



Laser-
öffnung

Schnelle & sichere
Schnittstelle
für Aufsätze

Touchscreen,
Bedienung
auch mit
Handschuhen

Scannen/
Bestätigen

Zurück

Batterie,
9+ Stunden
Betrieb;
optional:
COTS-
Batterie-
chassis

Halter für
Handgelenk-
band

USB-C-Port
für Strom &
Daten-
transfer

Ein/Aus

Laser-
emissions-
anzeige



Batterie

Anschliessen



Entfernen



Mira Mk2 Quick Guide


8.952.8103DE / v1 / 2026-09-09



Bibliotheken auswählen





OP / Probenname

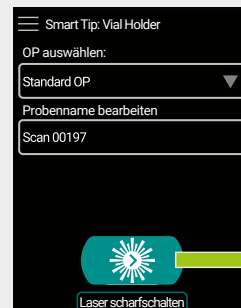

Spektrum aufnehmen




Resultate

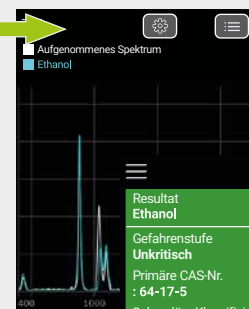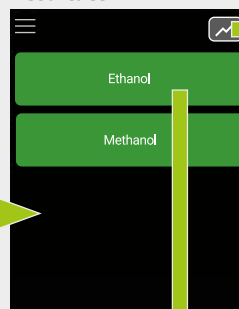

Diagramm

- = Nicht als gefährlich eingestuft
- = Ausgangsstoff oder Streckmittel
- = verbotenes bzw. gefährliches Material
- = Keine Angaben / nicht eindeutig

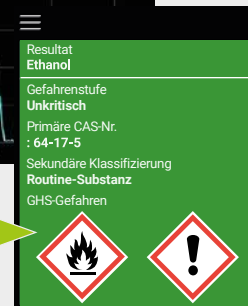

Detailinformationen

MIRA intelligenter Universalaufsatz (iUA)

Laserklasse 3R



Das iUA vereint mehrere Arbeitsabstände (WD) in einem einzigen Aufsatz.



WD $\approx$ 1 mm



Fläche



WD $\approx$ 5 mm



Beutel



WD $\approx$ 8 mm



Flasche

MIRA Winkelaufsatz

Laserklasse 3R



Substanzen auf einer horizontalen Oberfläche



Laseröffnung auf unbekannte Substanzen stellen.



MIRA Mk2 Tastkopfsonde

Laserklasse 3R



Direkter Kontakt mit der Substanz



Rostfreier Stahl

Zusätzliche Befestigung

MIRA SERS-Aufsatz

Laserklasse 3R



1 Lösungsmittel in ein Gefäß geben.

2 Probe hinzufügen.

3 Gefäß schliessen und schütteln.

4 Einen Teil der Mischung auf den Streifen tröpfeln oder den Streifen in das Gefäß tauchen.


Nachweis von Spurenanalyten



5 Den Streifen in den Aufsatz schieben.

MIRA Vialhalter MIRA grosser Vialhalter

Laserklasse 1

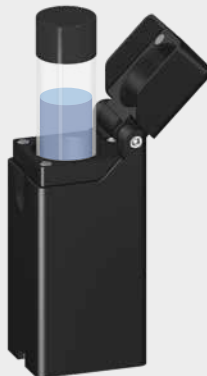


Flüssige oder feste Proben in Vials



Verschlüsselter Aufsatz minimiert die Auswirkungen von Umgebungslicht und Probenwinkel.

MIRA Tablettenhalter **Laserklasse 1**

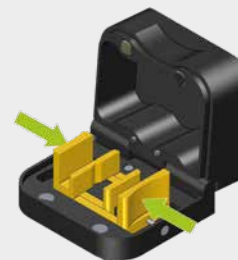

1 Den Deckel öffnen.

2 Die Hebel zusammendrücken und die Tablette in die Mitte legen.

3 Die Hebel loslassen, um die Tablette zu fixieren.