

tiamo Handbuch

Programmversion 1.0



Teachware
Metrohm AG
Oberdorfstrasse 68
CH-9101 Herisau
teachware@metrohm.com

Diese Gebrauchsanweisung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Gebrauchsanweisung wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht vollständig auszuschliessen. Bitte richten Sie diesbezügliche Hinweise an die obenstehende Adresse.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1	Einführung	1
1.1	Willkommen bei tiamo	1
1.2	Bedienung	2
1.3	Geräteeinbindung	2
1.4	Methodeneditor	3
1.5	Datenbank	3
1.6	Kommunikation	4
1.7	Konformität	4
1.8	Versionen	5
1.9	Online-Hilfe	6
Kapitel 2	Allgemeine Programmfunktionen	7
2.1	Programmteile	7
2.2	Anmeldung/Passwortschutz	8
2.2.1	Allgemeines	8
2.2.2	Anmelden	9
2.2.3	Manuell abmelden	9
2.2.4	Automatisch abmelden	9
2.2.5	Passwort ändern	10
2.3	Elektronische Unterschriften	11
2.3.1	Regeln	11
2.3.2	Ablauf	11
2.3.3	Unterschrift Stufe 1	12
2.3.4	Unterschrift Stufe 2	13
2.3.5	Unterschriften Stufe 2 löschen	14
2.4	Formel-Editor	16
2.4.1	Übersicht	16
2.4.2	Eingabefeld	17
2.4.3	Variablen	18
	Übersicht	18
	Methodenvariablen	18

	Befehlsvariablen	19
	Resultatvariablen	24
	Bestimmungsvariablen	24
	Systemvariablen	25
	Common Variablen	26
2.4.4	Operatoren/Funktionen	27
	Operatoren - Arithmetik	28
	Addition	28
	Subtraktion	29
	Multiplikation	30
	Division	31
	Potenzierung	32
	Operatoren - Logik	33
	AND	33
	OR	34
	Operatoren - Vergleich	35
	Gleich	35
	Grösser als	36
	Grösser gleich	37
	Kleiner als	38
	Kleiner gleich	39
	Ungleich	40
	Funktionen - Arithmetik	41
	Exponentialfunktion	41
	Natürlicher Logarithmus	41
	Dekadischer Logarithmus	41
	Quadratwurzel	42
	Absolutwert	42
	Nachkommateil	43
	Vorkommateil	43
	Vorkommateil runden	43
	Vorzeichen	44
	Funktionen - Datum/Zeit	45
	Time()	45
	Time(Datum)	45
	Time(Datum + Zeit)	46
	Funktionen - Typumwandlung	47
	NumberToText	47
	NumberToTime	47
	TextToNumber	47
	TextToTime	48
	TimeToNumber	49
	TimeToText	49
	Funktionen - Text	51
	TextPosition	51
	SubText	51
	Trim	52
	Diverse Funktionen	53
	Case	53
	Error	54
	ASCII-Tabelle	55

2.5	Editieren	56
2.5.1	Texteditor	56
2.5.2	Datum wählen	57
2.6	Manuelle Bedienung	58
2.6.1	Allgemeines	58
2.6.2	Geräteauswahl	58
2.6.3	Funktionen	59
2.6.4	Grafikanzeige	59
2.6.5	Dosieren	59
	Allgemein	60
	Vorbereiten	61
	Füllen	62
	Leeren	63
	Fixvolumen dosieren	64
	Dosieren	66
2.6.6	Rühren	67
	Ein-/Ausschalten	67
	Dauerbetrieb	69
2.6.7	Remote-Funktionen	70
2.6.8	Probenwechsler-Funktionen	71
	Allgemein	72
	Bewegen	73
	Position zuweisen	75
	Pumpen	77
	Heizung/Gas	78

Kapitel 3 **Arbeitsplatz** **81**

3.1	Allgemeines	81
3.1.1	Allgemeines	81
3.1.2	Oberfläche	81
3.1.3	Menüleiste	81
	Menü Datei	82
	Menü Ansicht	82
	Menü Extras	83
	Menü Hilfe	83
3.1.4	Symbolleiste	84
3.1.5	Unterfenster	84
3.1.6	Funktionen	85
3.1.7	Arbeitsplatzansichten	86
	Layout ändern	87
	Ansicht speichern	88
	Ansicht laden	88
	Ansicht umbenennen	89
	Ansicht löschen	89

3.2	Arbeitsplätze	90
3.2.1	Arbeitsplatz neu erstellen	90
3.2.2	Arbeitsplatz Bearbeiten	90
3.2.3	Arbeitsplatz anzeigen	91
	Auswahl des Arbeitsplatzes im Arbeitsplatzsymbol	91
	Einzelnen Arbeitsplatz anzeigen	91
	Arbeitsplätze nebeneinander anzeigen	91
	Arbeitsplätze untereinander anzeigen	91
3.2.4	Arbeitsplatz schliessen	91
3.3	Probentabellen	92
3.3.1	Bearbeiten	92
	Probentabelle neu erstellen	92
	Probentabelle öffnen	92
	Probentabelle bearbeiten	93
	Probedaten bearbeiten	94
	Probedaten importieren	96
	Probentabelle speichern	96
	Probentabelle drucken (PDF)	97
3.3.2	Eigenschaften	98
	Anzeige	98
	Bearbeiten	99
	Abarbeiten	100
	Datenimport	101
	Kommentar	103
3.3.3	Verwalten	103
	Probentabellen verwalten	103
	Probentabelle umbenennen	104
	Probentabelle kopieren	104
	Probentabelle löschen	104
	Probentabelle exportieren	104
	Probentabelle importieren	105
3.4	Extras	106
3.4.1	Ablauftest	106
3.4.2	Probenzuordnungstabelle	106
	Allgemeines	106
	Probenzuordnungstabelle	107
	Probenzuordnung	107
	Probenzuordnungsabfrage	108
3.4.3	Textvorlagen	109
3.5	Unterfenster Ablauf	110
3.5.1	Allgemeines	110
3.5.2	Einzelbestimmung	110
	Übersicht	110
	Bedienungselemente	111
	Statusanzeige	112
	Bestimmungsparameter	112
	Anmerkung ändern	113
	Probedaten	113
	Live-Änderungen	114

Änderungskommentar für Probedaten.....	115
Bestimmungsablauf.....	115
Eigenschaften	118
Anzeige	118
Abarbeiten.....	119
Datenimport	120
3.5.3 Bestimmungsserie	121
Übersicht.....	121
Bedienungselemente.....	122
Statusanzeige	123
Bestimmungsparameter	123
Anmerkung ändern	124
Autostartzähler ändern.....	124
Probedaten.....	125
Bestimmungsablauf.....	126
Arbeitsprobentabelle	129
Neue leere Probentabelle laden	129
Probentabelle laden.....	129
Arbeitsprobentabelle bearbeiten	130
Probedaten bearbeiten	132
Probedaten importieren	134
Probedaten speichern	134
Ablauftest	135
Arbeitsprobentabelle drucken (PDF)	135
Eigenschaften	136
Anzeige	136
Bearbeiten.....	138
Abarbeiten.....	139
Datenimport	140
Kommentar	142
3.6 Unterfenster Methode.....	143
3.6.1 Allgemeines	143
3.6.2 Zoom für Methodenfenster	143
3.6.3 Live-Änderungen.....	143
3.6.4 Befehle abbrechen	144
3.7 Unterfenster Liveanzeige	145
3.7.1 Allgemeines	145
3.7.2 Spuren.....	145
3.7.3 Applikationsnotiz.....	146
3.7.4 Eigenschaften.....	146
3.8 Unterfenster Report	149
3.8.1 Allgemeines	149
3.8.2 Aktueller Report	149
3.8.3 Ausgewählter Report	149
3.8.4 Reportübersicht.....	149

Kapitel 4 **Datenbank 151**

4.1 Allgemeines 151

4.1.1 Allgemeines 151

4.1.2 Oberfläche 151

4.1.3 Menüleiste 152

Menü Datei 152

Menü Datei 152

Menü Ansicht 153

Menü Bestimmungen 153

Menü Extras 154

Menü Hilfe 155

4.1.4 Symbolleiste 155

4.1.5 Unterfenster 156

4.1.6 Funktionen 157

4.1.7 Datenbankansichten 157

Layout ändern 158

Ansicht speichern 159

Ansicht laden 160

Ansicht umbenennen 160

Ansicht löschen 160

4.2 Datenbanken öffnen/anzeigen 161

4.2.1 Datenbank öffnen 161

4.2.2 Auswahl der Datenbank im Datenbanksymbol 162

4.2.3 Einzelne Datenbank anzeigen 162

4.2.4 Datenbanken nebeneinander anzeigen 162

4.2.5 Datenbanken untereinander anzeigen 162

4.2.6 Datenbank schliessen 163

4.3 Datenbanken verwalten 164

4.3.1 Datenbanken verwalten 164

4.3.2 Datenbank neu erstellen 165

4.3.3 Datenbank umbenennen 165

4.3.4 Datenbank löschen 166

4.3.5 Datenbankeneigenschaften 166

Allgemein 166

Zugriffsrechte 167

Sicherung 167

Überwachung 168

4.3.6 Datenbank manuell sichern 169

4.3.7 Datenbank wiederherstellen 169

4.4	Reportvorlagen.....	171
4.4.1	Reportvorlage neu erstellen	171
4.4.2	Reportvorlage öffnen	171
4.4.3	Reportvorlagen bearbeiten	172
	Allgemeines	172
	Oberfläche	173
	Menüleiste.....	173
	Menü Datei	174
	Menü Datei	174
	Menü Ansicht.....	174
	Menü Einfügen	175
	Menü Extras.....	175
	Menü Hilfe	175
	Allgemeine Symbolleiste.....	175
	Bausteinspezifische Symbolleiste	176
	Bausteinleiste.....	176
	Funktionen	177
	Seite einrichten	177
	Bereiche definieren	178
	Seiten einfügen	179
	Bausteine einfügen	179
	Bausteine bearbeiten	180
	Zoom für Reportvorlagen.....	181
	Seitenansicht.....	181
	Kommentar	182
	Optionen	183
	Reportvorlage speichern.....	183
	Bausteine	184
	Textfeld.....	184
	Datenfeld.....	185
	Datumsfeld	187
	Zeitfeld	188
	Seitenzahl.....	189
	Anzahl Seiten	190
	Fixreport	191
	Bild	191
	Linie.....	192
	Rechteck	193
	Kurvenfeld	193
	Kurvenfeld	193
	Kurvenfeld - x-Achse	194
	Kurvenfeld - y1-Achse	195
	Kurvenfeld - y2-Achse	197
	Kurvenfeld - Optionen	198
	Kalibrierkurvenfeld	199
4.4.4	Reportvorlagen verwalten	201
	Reportvorlagen verwalten	201
	Reportvorlage umbenennen	201
	Reportvorlage kopieren	202
	Reportvorlage löschen.....	202
	Reportvorlage exportieren	202
	Reportvorlage importieren	202

4.5	Vorlagen für Kontrollkarte	203
4.5.1	Vorlagen für Kontrollkarten verwalten	203
4.5.2	Eigenschaften	203
	Grafikparameter	204
	Grenzwerte	205
	Statistik	205
	Kommentar	206
4.6	Vorlagen für Kurven überlagern	207
4.6.1	Vorlagen für Kurvenüberlagerung verwalten	207
4.6.2	Eigenschaften	207
	x-Achse	208
	y-Achse	209
	Optionen	210
	Kommentar	211
4.7	Exportvorlagen	212
4.7.1	Verwalten	212
4.7.2	Eigenschaften	213
	Felder auswählen	215
	Optionen	215
4.8	Unterfenster Bestimmungsübersicht	216
4.8.1	Allgemeines	216
	Übersicht	216
	Bestimmungstabelle	216
	Spaltenanzeige	217
	Filterauswahl	218
	Navigationsleiste	218
	Tabellennavigation	219
	Datensatzauswahl	219
4.8.2	Funktionen	220
	Funktionen	220
	Bestimmungstabelle aktualisieren	220
	Bestimmungskommentar	221
	Bestimmungen suchen	221
	Bestimmungen filtern	223
	Letzter Filter	223
	Schnellfilter	223
	Spezialfilter	223
	Filterbedingung bearbeiten	224
	Filter speichern	225
	Alle Statistikdatensätze	226
	Filter entfernen	226
	Bestimmungen unterschreiben	226
	Regeln	226
	Bestimmungen auf Stufe 1 unterschreiben	227
	Bestimmungen auf Stufe 2 unterschreiben	228
	Bestimmungsunterschriften anzeigen	229
	Unterschriften 2 für Bestimmungen löschen	229
	Bestimmungen exportieren	230
	Bestimmungen importieren	230
	Bestimmungen löschen	231
	Bestimmungsübersicht drucken	231

	Bestimmungsreport drucken	232
	Bestimmungs-Methode anzeigen	233
	Bestimmungs-History anzeigen	234
	Kalibrierkurve anzeigen	234
	Kontrollkarte	235
	Kurven überlagern	237
4.8.3	Nachbearbeiten	239
	Allgemeines	239
	Nachbearbeitungsfenster	239
	Regeln beim Nachrechnen	240
	Änderungen	242
	Variablen	242
	Methode	243
	Statistik	244
	Kurvenauswertung	246
	Kurvenauswertung bearbeiten	247
	Kurvenauswertung bearbeiten	247
	Eigenschaften	249
	x-Achse	250
	y-Achse	251
	Optionen	252
	Resultatanzeige	253
	Änderungskommentar für Bestimmungen	254
4.9	Unterfenster Informationen	255
4.9.1	Übersicht	255
4.9.2	Bestimmung	256
4.9.3	Methode	258
4.9.4	Probe	259
4.9.5	Konfiguration	260
4.9.6	Meldungen	262
4.9.7	Bestimmungskommentar	263
4.10	Unterfenster Resultate	264
4.10.1	Übersicht	264
4.10.2	Resultatübersicht	264
4.10.3	Berechnungsbefehl	265
4.10.4	Eigenschaften	266
4.11	Unterfenster Kurven	268
4.11.1	Allgemeines	268
4.11.2	Eigenschaften	269
	x-Achse	270
	y1-Achse	271
	y2-Achse	272
	Optionen	273
	Messpunktliste	275

Kapitel 5	Methoden	277
5.1	Allgemeines	277
5.1.1	Allgemeines	277
5.1.2	Oberfläche	277
5.1.3	Menüleiste	278
	Menü Datei	278
	Menü Bearbeiten	279
	Menü Ansicht	279
	Menü Einfügen	279
	Menü Extras	280
	Menü Hilfe	280
5.1.4	Symbolleiste	280
5.1.5	Funktionen	281
5.2	Methodeneditor	282
5.2.1	Methode neu erstellen	282
5.2.2	Methode öffnen	282
5.2.3	Methode anzeigen	284
	Auswahl der Methode im Methodensymbol	284
	Einzelne Methode anzeigen	284
	Methoden nebeneinander anzeigen	284
	Methoden untereinander anzeigen	284
	Zoom für Methoden	285
5.2.4	Methode bearbeiten	285
	Spuren bearbeiten	285
	Neue Spur einfügen	285
	Spur auswählen	286
	Spur verschieben	286
	Spur kopieren	286
	Spur ausschneiden	286
	Spur einfügen	287
	Spur löschen	287
	Befehle bearbeiten	287
	Neuen Befehl einfügen	287
	Befehl auswählen	288
	Befehle verschieben	288
	Befehle kopieren	288
	Befehle ausschneiden	288
	Befehle einfügen	288
	Befehle löschen	289
	Befehlseigenschaften	289
	Befehlskommentar	289
5.2.5	Methode testen	290
5.2.6	Methode speichern	290
5.2.7	Änderungskommentar für Methode	292
5.2.8	Methoden schliessen	292

5.3	Methoden verwalten	293
5.3.1	Methoden verwalten	293
5.3.2	Methode umbenennen	294
5.3.3	Methode kopieren	295
5.3.4	Methode verschieben	295
5.3.5	Methode löschen	295
5.3.6	Methode exportieren	295
5.3.7	Methode importieren.....	296
5.3.8	Methoden unterschreiben.....	296
	Regeln	296
	Methode auf Stufe 1 unterschreiben	297
	Methode auf Stufe 2 unterschreiben	298
	Methodenunterschriften anzeigen.....	299
	Unterschriften 2 für Methoden löschen	299
	Methoden-History anzeigen.....	300
5.4	Methodengruppen verwalten.....	301
5.4.1	Methodengruppen verwalten.....	301
5.4.2	Methodengruppen bearbeiten	301
	Allgemein	302
	Zugriffsrechte.....	302
5.5	Spuren	303
5.5.1	Allgemeines	303
5.5.2	Spurtypen	303
	Hauptspur	303
	Normalspur	304
	Seriestartspur	305
	Serieendspur	305
	Exitspur	305
	Fehlerspur	306
5.5.3	Spuren bearbeiten.....	307
5.6	Befehle.....	308
5.6.1	Allgemeines	308
5.6.2	Befehle bearbeiten.....	309
5.6.3	Befehlsübersicht	309
5.6.4	Spurbefehle	311
	START.....	311
	Allgemein.....	312
	Applikationsnotiz	313
	Methodenvariablen (Tabelle)	314
	Methodenvariablen (Eigenschaften).....	315
	TRACK.....	317
	SERIES START.....	318
	SERIES END.....	318
	EXIT	318
	EXIT	319
	END.....	319

5.6.5	Titrationsebefehle.....	320
	DET	320
	DET pH.....	321
	Allgemein/Hardware.....	322
	Startbedingungen	324
	Titrationseparameter	326
	Abbruchbedingungen	328
	Potentiometrische Auswertung	329
	Weitere Auswertungen	333
	Weitere Messwerte	335
	DET U	337
	Allgemein/Hardware.....	338
	Startbedingungen	340
	Titrationseparameter	342
	Abbruchbedingungen	342
	Potentiometrische Auswertung	343
	Weitere Auswertungen	345
	Weitere Messwerte	347
	DET Ipol.....	347
	Allgemein/Hardware.....	348
	Startbedingungen	350
	Titrationseparameter	350
	Abbruchbedingungen	350
	Potentiometrische Auswertung	350
	Weitere Auswertungen	351
	Weitere Messwerte	353
	DET Upol	353
	Allgemein/Hardware.....	354
	Startbedingungen	356
	Titrationseparameter	358
	Abbruchbedingungen	360
	Potentiometrische Auswertung	361
	Weitere Auswertungen	363
	Weitere Messwerte	365
	MET.....	365
	MET pH	365
	Allgemein/Hardware.....	366
	Startbedingungen	366
	Titrationseparameter	367
	Abbruchbedingungen	368
	Potentiometrische Auswertung	368
	Weitere Auswertungen	368
	Weitere Messwerte	369
	MET U.....	369
	Allgemein/Hardware.....	369
	Startbedingungen	369
	Titrationseparameter	370
	Abbruchbedingungen	370
	Potentiometrische Auswertung	370
	Weitere Auswertungen	370
	Weitere Messwerte	370
	MET Ipol	370
	Allgemein/Hardware.....	371
	Startbedingungen	371
	Titrationseparameter	371
	Abbruchbedingungen	371
	Potentiometrische Auswertung	371

Weitere Auswertungen	371
Weitere Messwerte	371
MET Upol	371
Allgemein/Hardware	372
Startbedingungen	372
Titrationsparameter	372
Abbruchbedingungen	372
Potentiometrische Auswertung	372
Weitere Auswertungen	372
Weitere Messwerte	372
SET	373
SET pH	374
Allgemein/Hardware	375
Startbedingungen	375
Regelparameter	376
Titrationsparameter	378
Abbruchbedingungen	379
Konditionieren	380
Weitere Auswertungen	381
Weitere Messwerte	382
SET U	382
Allgemein/Hardware	383
Startbedingungen	383
Regelparameter	384
Titrationsparameter	386
Abbruchbedingungen	386
Konditionieren	386
Weitere Auswertungen	386
Weitere Messwerte	387
SET Ipol	388
Allgemein/Hardware	388
Startbedingungen	388
Regelparameter	389
Titrationsparameter	389
Abbruchbedingungen	389
Konditionieren	389
Weitere Auswertungen	389
Weitere Messwerte	389
SET Upol	389
Allgemein/Hardware	390
Startbedingungen	390
Regelparameter	392
Titrationsparameter	394
Abbruchbedingungen	394
Konditionieren	394
Weitere Auswertungen	394
Weitere Messwerte	395
KFT	396
KFT Ipol	397
Allgemein/Hardware	398
Startbedingungen	400
Regelparameter	400
Titrationsparameter	402
Abbruchbedingungen	402
Konditionieren	403
Weitere Auswertungen	403
Weitere Messwerte	403

KFT Upol	403
Allgemein/Hardware.....	404
Startbedingungen	404
Regelparameter	404
Titrationsparameter	404
Abbruchbedingungen	404
Konditionieren	404
Weitere Auswertungen	404
Weitere Messwerte	404
KFC	405
Allgemein/Hardware.....	406
Startbedingungen	407
Regelparameter	408
Titrationsparameter	409
Abbruchbedingungen	410
Konditionieren	410
Weitere Auswertungen	411
Weitere Messwerte	412
Auswertung	412
pK-Wert und Halbneutralisationspotential	412
Minimum-/Maximum-Auswertung	413
Knickpunkt-Auswertung	413
5.6.6 Messbefehle	414
MEAS pH	414
Allgemein/Hardware.....	415
Messparameter	417
Auswertungen	419
Weitere Messwerte	421
MEAS U	421
Allgemein/Hardware.....	421
Messparameter	423
Auswertungen	425
Weitere Messwerte	427
MEAS Ipol.....	427
Allgemein/Hardware.....	428
Messparameter	429
Auswertungen	429
Weitere Messwerte	429
MEAS Upol	430
Allgemein/Hardware.....	430
Messparameter	432
Auswertungen	434
Weitere Messwerte	435
MEAS T	436
Allgemein/Hardware.....	436
Messparameter	438
Auswertungen	440
Weitere Messwerte	442
MEAS T/Flow	442
Allgemein/Hardware.....	442
Messparameter	443
Auswertungen	443
Weitere Messwerte	444
MEAS Conc	444
Allgemein/Hardware.....	445
Messparameter	446
Weitere Messwerte	446

MEAS Cond	446
Allgemein/Hardware	447
Messparameter	448
Auswertungen	449
Weitere Messwerte	451
5.6.7 Kalibrierbefehle	451
Kalibrieren mit manuellem Lösungswechsel	452
Kalibrieren mit automatischem Lösungswechsel	453
CAL LOOP pH	454
CAL LOOP pH - Eigenschaften	454
CAL MEAS pH	456
Allgemein/Hardware	456
Messparameter	458
CAL LOOP Conc	459
CAL LOOP Conc - Eigenschaften	459
CAL MEAS Conc	460
Allgemein/Hardware	460
Messparameter	461
5.6.8 Dosierbefehle	462
ADD	462
Allgemein/Hardware	463
Parameter	464
LQH	465
Allgemein/Hardware	465
Parameter	466
PREP	468
PREP - Eigenschaften	468
EMPTY	469
EMPTY - Eigenschaften	470
5.6.9 Automationsbefehle	471
MOVE	471
MOVE - Eigenschaften	472
SWING	474
SWING - Eigenschaften	474
LIFT	475
LIFT - Eigenschaften	476
PUMP	477
PUMP - Eigenschaften	477
STIR	478
STIR - Eigenschaften	479
RACK	480
RACK - Eigenschaften	481
HEATER	482
HEATER - Eigenschaften	482
FLOW	484
FLOW - Eigenschaften	484
5.6.10 Resultatbefehle	485
CALC	485
CALC - Resultattabelle	486
CALC Resultateigenschaften	488
Definition	488
Überwachung	489
Resultat - Optionen	491
E-Mail senden	492

Resultatvorlagen	492
Resultatvorlagen verwalten	492
Resultatvorlage speichern	493
Resultatvorlage umbenennen	493
DATABASE	494
DATABASE - Eigenschaften	494
REPORT	495
REPORT - Eigenschaften	495
EXPORT	496
EXPORT - Eigenschaften	496
5.6.11 Kommunikationsbefehle	497
CTRL	497
CTRL - Eigenschaften	497
SCAN	499
SCAN - Eigenschaften	499
SEND	500
SEND - Eigenschaften	501
SEND - Ereignismeldungen	501
RECEIVE	503
RECEIVE- Eigenschaften	503
SEND - Ereignis/Status	504
TRANSFER	505
TRANSFER - Eigenschaften	506
TRANSFER - Transferanweisungen	507
5.6.12 Verschiedene Befehle	509
REQUEST	509
REQUEST - Eigenschaften	510
REQUEST - Abfrage der Probedaten	511
CALL	512
CALL - Eigenschaften	512
CALL - Aufruf	513
LOOP	514
LOOP - Eigenschaften	515
WAIT	516
WAIT - Eigenschaften	516
SEQUENCE	517
SEQUENCE - Eigenschaften	518
5.7 Methodenreports	519
Methodenreports wählen	519
Methodenablauf-Report	519
Methodenparameter-Report	519
Titrations- und Messparameter-Report	520

Kapitel 6	Konfiguration	521
6.1	Allgemeines.....	521
6.1.1	Allgemeines	521
6.1.2	Oberfläche	521
6.1.3	Menüleiste	522
	Menü Datei	522
	Menü Ansicht	522
	Menü Extras	522
	Menü Hilfe	523
6.1.4	Symbolleiste	523
6.1.5	Unterfenster	524
6.1.6	Funktionen.....	524
6.1.7	Konfigurationsansichten	525
	Layout ändern	526
	Ansicht speichern.....	527
	Ansicht laden	527
	Ansicht umbenennen.....	528
	Ansicht löschen	528
6.2	Administration.....	529
6.2.1	Sicherheitseinstellungen.....	529
	Anmeldung/Passwortschutz	529
	E-Mail senden	532
	Audit Trail/Änderungen	533
	Unterschriften.....	535
	Standardbegründungen	536
6.2.2	Anwenderverwaltung	537
	Anwendergruppen	538
	Gruppeninformationen.....	538
	Zugriffsrechte	539
	Unterschriften.....	540
	Optionen	541
	Anwendergruppe hinzufügen	542
	Anwendergruppe kopieren	542
	Anwendergruppe umbenennen.....	542
	Anwendergruppe löschen.....	543
	Anwender hinzufügen	543
	Anwender	543
	Anwenderinformationen.....	543
	Anwender hinzufügen	545
	Startpasswort setzen.....	545
6.2.3	Programmadministration.....	546
	Sicherungsverzeichnisse	546
	Sicherungsverzeichnisse	546
	Neues Sicherungsverzeichnis erstellen	547
	Sicherungsverzeichnis bearbeiten	547
	Rechnerkennungen	548
	Lizenzen	548

6.3	Konfigurationsdaten	549
6.3.1	Exportieren/Importieren	549
	Konfigurationsdaten exportieren.....	549
	Konfigurationsdaten importieren.....	550
6.3.2	Sichern/Wiederherstellen	551
	Konfigurationsdaten automatisch sichern.....	551
	Konfigurationsdaten manuell sichern	552
	Konfigurationsdaten wiederherstellen	552
6.3.3	Vorlagen	554
	Eigene Kalibrierpuffer	554
	Vorlagen für Eingangsleitungen	555
	Vorlagen für Ausgangsleitungen	556
6.3.4	Optionen	558
	Allgemein.....	558
	Speichern	559
	PDF.....	559
6.4	Audit Trail	561
6.4.1	Allgemeines.....	561
	Allgemeines	561
	Oberfläche.....	561
	Menüleiste.....	561
	Menü Datei	562
	Menü Ansicht	562
	Menü Filter	562
	Menü Extras	562
	Menü Hilfe	562
6.4.2	Symbolleiste.....	563
6.4.3	Filterauswahl	563
6.4.4	Navigationsleiste	563
6.4.5	Funktionen	564
6.4.6	Audit-Trail-Tabelle	564
	Spaltenanzeige	566
	Audit Trail filtern	566
	Letzter Filter.....	567
	Schnellfilter.....	567
	Spezialfilter	567
	Filterbedingung bearbeiten.....	568
	Filter speichern.....	569
	Filter entfernen	570
	Audit Trail aktualisieren	570
	Audit Trail exportieren.....	570
	Audit Trail archivieren	571
	Audit Trail löschen.....	571
	Audit Trail drucken	572
	Audit Trail überwachen	573

6.5	Unterfenster Geräte	574
6.5.1	Allgemeines	574
6.5.2	Gerätetabelle	574
	Spaltenanzeige	576
	Neues Gerät hinzufügen	577
	Gerät löschen	577
	Geräteliste drucken	577
6.5.3	Geräteeigenschaften	578
	Übersicht	578
	Titrande	578
	Allgemein	579
	Neue Programmversion laden	579
	Messeingänge	580
	MSB #	581
	GLP	582
	Titrimo	583
	Allgemein	583
	Neue Programmversion laden	584
	Int. Dosierer D0	585
	Ext. Dosierer D#	585
	RS 232	586
	GLP	586
	Coulometer	587
	Allgemein	588
	Neue Programmversion laden	588
	RS 232	589
	GLP	589
	Konduktometer	590
	Allgemein	591
	Neue Programmversion laden	591
	RS 232	592
	GLP	592
	Dosing Interface	593
	Allgemein	594
	Neue Programmversion laden	594
	MSB #	595
	GLP	596
	814/815 USB Sample Processor	597
	Allgemein	598
	Neue Programmversion laden	598
	Turm #	599
	Konfiguration Schwenkarm	600
	Externe Position	601
	Rack	601
	MSB #	603
	GLP	604
	778/789 Sample Processor	605
	Allgemein	605
	Neue Programmversion laden	606
	Turm #	607
	Konfiguration Schwenkarm	608
	Externe Position	609
	Rack	610
	MSB #	611
	RS 232	612

GLP.....	612
730 Sample Changer	613
Allgemein.....	614
Neue Programmversion laden	614
Türme	615
Rack	616
Dosierer	617
RS 232	617
GLP	618
774 Oven Sample Processor	619
Allgemein.....	619
Neue Programmversion laden	620
Türme	621
Rack	621
Rackeigenschaften bearbeiten (774)	622
Liftpositionen	623
Spezialbecher	623
Dosierer	624
Ofen.....	624
Gas	625
RS 232	626
GLP	626
Waagen.....	627
Allgemein.....	628
RS 232	629
Verbindung testen	629
GLP	630
Barcodeleser	631
Allgemein.....	632
Einstellungen.....	633
Verbindung testen	633
GLP	634
RS232-Gerät	635
Allgemein.....	635
RS 232	636
Verbindung testen	637
GLP	638
6.6 Unterfenster Titrimittel/Lösungen	640
6.6.1 Allgemeines.....	640
6.6.2 Lösungstabelle.....	640
Spaltenanzeige	642
Neue Lösung hinzufügen	642
Lösung löschen	643
Lösungsliste drucken	643
6.6.3 Lösungseigenschaften	643
Lösung	644
Titer.....	645
Titer-History	647
Titer-History - Grenzwerte	648
Wechseleinheit	649
Dosiereinheit	652
GLP	655

6.7	Unterfenster Sensoren	657
6.7.1	Allgemeines	657
6.7.2	Sensortabelle	657
	Spaltenanzeige	659
	Neuen Sensor hinzufügen.....	659
	Sensor löschen	660
	Sensorliste drucken	660
6.7.3	Sensoreigenschaften	661
	Sensor.....	661
	Kalibrierdaten.....	663
	Grenzwerte.....	665
	History.....	666
	Sensor-History - Grenzwerte.....	667
6.8	Unterfenster Common Variablen	670
6.8.1	Allgemeines	670
6.8.2	Tabelle der Common Variablen	670
	Spaltenanzeige	671
	Neue Common Variable hinzufügen.....	672
	Common Variable löschen.....	672
	Liste der Common Variablen drucken.....	672
6.8.3	Eigenschaften der Common Variablen	673
	Common Variable	673
	History.....	675
	History - Grenzwerte.....	676
6.9	Unterfenster Rackdaten	678
6.9.1	Allgemeines	678
6.9.2	Racktable	678
	Neues Rack hinzufügen	679
	Rack löschen	680
	Rackliste drucken	680
6.9.3	Rackeigenschaften	681
	Rackparameter.....	682
	Liftpositionen.....	683
	Spezialbecher	684
	Spezialbecherkonfiguration	685

Kapitel 7	Index.....	687

Kapitel 1 Einführung

1.1 Willkommen bei tiamo



tiamo = titration and more

tiamo ist eine Steuer- und Datenbanksoftware für Titriergeräte, Dosierer und Probenwechsler und ermöglicht die komplette Laborautomation. Daher steht der Name **tiamo** für «**t**itration **and** **m**ore» – **tiamo** kann mehr als nur titrieren.

tiamo ist die Nachfolgesoftware von TiNet und Workcell. Metrohm bietet damit weltweit ein einheitliches Softwareprodukt für die Laborautomation an. Somit kann ein international tätiges Unternehmen global dieselbe Softwareplattform für die Bearbeitung ihrer Proben einsetzen und Daten und Methoden ohne Verluste austauschen.

Übersicht über die wichtigsten Programm-Merkmale

- Leicht zu bedienende und konfigurierbare Programmoberfläche
- Einfache Einbindung von Geräten und Zubehör
- Komfortabler Methodeneditor
- Datenbank-basiertes Programm mit Client/Server-Funktionalität
- Vielfältige Import- und Exportmöglichkeiten
- FDA-Kompatibilität nach 21 CFR Part 11
- Umfangreiche Online-Hilfe

1.2 Bedienung

Das moderne **Benutzerinterface** macht es dem Anwender einfach, sich in *tiamo* rasch zurechtzufinden. Alle Befehle und Steuerelemente sind dort angebracht, wo man sie erwartet. Die *tiamo*-Leiste am linken Bildschirmrand ermöglicht den Zugang zu den vier Grundelementen von *tiamo*:



Je nach Zugriffsberechtigung sind diese Schaltflächen sichtbar oder verborgen. Im oberen Bereich des Bildschirms befindet sich die Menü-Leiste. Auch hier kann, je nach Zugriffsberechtigung, jeder einzelne Befehl verborgen werden.

Im Zentrum des Bildschirms stehen die **Informationsfenster** mit den Einstellungen, Probeneingabemasken, Live-Kurven oder Resultaten. Diese Ansicht ist mit Hilfe des neuen Layout-Managers für jeden Anwender individuell einstellbar. Das bedeutet, dass der Anwender nur die Fenster oder Schaltflächen sieht, die er für seine Arbeit benötigt. Damit verkürzt sich die Einarbeitungszeit für Routineanwender auf ein Minimum; ebenso gehören durch Bildschirm-Überladung bedingte Fehlbedienungen der Vergangenheit an.

Die mit dem Titrando-System erfolgreich eingeführten **Methoden- und Berechnungsvorlagen** stehen auch in *tiamo* zur Verfügung. Eine Vielzahl von erprobten Methoden ermöglichen es jedem Anwender, schnell und einfach neue Methoden zu erstellen und sofort einzusetzen.

1.3 Geräteeinbindung

tiamo bringt die Welt der **Titrimo-Geräte** mit der neuen Generation des **Titrandosystems** unter einen Hut. Nicht selbstverständlich im Softwaresektor ist die Kompatibilität mit bestehenden Metrohm-Geräten. Die ganze Palette der Titrimo-Familie, die schon in TiNet eingebunden war, ist mit *tiamo* verwendbar, und dies nach über 10 Jahren am Markt! Zusätzlich sind Probenwechsler, die teilweise nicht mehr im Verkaufsprogramm sind, in *tiamo* eingebunden. Damit sichert Metrohm ihre Investitionen!

Natürlich sind alle Modelle der neuen Titrando-Generation sowie die neuen Sample Processors mit *tiamo* kompatibel. So lassen sich die Vorteile der USB-Kommunikation, zum Beispiel Plug and Play oder die Erkennung der intelligenten Dosiersysteme, voll mit *tiamo* nutzen. Selbst ein Mischbetrieb aus älteren RS232-gesteuerten und neuen USB-gesteuerten Geräten ist ohne weiteres möglich.

Mit *tiamo* verwendbare Geräte

- **Titrandos**
808, 809, 835, 836, 841
- **Titrimos**
702, 716, 718, 719, 720, 721, 736, 751, 758, 784, 785, 794, 795, 798, 799
- **Konduktometer**
712
- **KF-Coulometer**
756, 831

- **Probenwechsler**
730, 774, 778, 789, 814, 815
- **Verschiedene**
Dosing Interface 846, Waagen, Barcodeleser...

1.4 Methodeneditor

Der neue grafische **Methoden-Editor** holt mehr aus ihrem Titrations-System heraus. Mit Hilfe der zahlreichen Vorlagen können Methoden einfach und schnell erstellt werden. Für die meisten Routine- und Automationsaufgaben sind bereits praxiserprobte Methoden vorhanden. Mit ein paar Klicks sind sie angepasst und einsatzbereit.

Neu lassen sich zeitlich **parallel ablaufende Aktionen** programmieren und verknüpfen. Zusammen mit dem neuen Titrando-System und den Robotic Sample Processors kann jetzt eine Probe vorbereitet werden, während die vorhergehende titriert wird. Dies spart Zeit und erhöht den Probendurchsatz. Die Krönung ist das gleichzeitige Bearbeiten von mehreren Proben. So kann ein Titrando zwei Titrationsen zur selben Zeit durchführen. Damit verdoppelt sich der Probendurchsatz!

tiamo ist flexibel und passt sich den Analysenabläufen an, nicht anders herum.

Funktionsübersicht

- Grafischer Methoden-Editor
- Methodenverwaltung
- Separate Verwaltung der Zugriffsrechte für jede Methodengruppe
- Vorlagen für Methodenentwicklung und Berechnungen
- Plausibilitätstest für Methoden
- Methoden lassen sich mit Kommentaren versehen
- Parallele Abläufe
- Loop-Funktion

1.5 Datenbank

tiamo basiert auf einer **objektorientierten Datenbank**, die sich in der Praxis bewährt hat. Alle Einstellungen, die Anwenderverwaltung, Methoden und Resultate werden in Datenbanken abgelegt. Diese Datenbanken können lokal auf dem Messrechner installiert sein und stellen ein einfaches Titrations-System dar. *tiamo* ist jedoch skalierbar und wächst mit den betrieblichen Anforderungen. Sobald Datensicherheit und zentrale Datenverwaltung dies erfordern, wird *tiamo* als **Client-Server-Konfiguration** eingerichtet. Dabei wird die *tiamo*-Datenbank auf einem Server installiert. Alle Mess- und Bürorechner arbeiten dann als Clients. In diesem Titrations-Netzwerk werden sämtliche Resultate zentral gespeichert und können von allen Client-PCs eingesehen und nachbearbeitet werden. Zusätzlich greifen alle Clients auf denselben Methodenpool zu.

Die neue Datenbank bietet alle wichtigen Werkzeuge für die Verwaltung, das Suchen und Gruppieren von Ergebnissen. Schnell-Filter lassen den Anwender in Sekunden Tausende von Bestimmungen durchsuchen und das Gesuchte übersichtlich darstellen. Chart-Plots geben eine schnelle Übersicht über die zeitliche Abfolge der Ergebnisse.

Alle Möglichkeiten der **Nachberechnung und Nachauswertung** stehen dem Anwender zur Verfügung.

Funktionsübersicht

- Objektorientierte Client-Server-Datenbank
- Schnellfilter und effiziente Suchfunktionen
- Kontrolle über Zugriffsrechte für jede Datenbank
- Automatische Datenbank-Sicherung
- Layout-Manager für Datenbankansicht
- Nachbearbeitung für Variablen, Methoden, Statistik und Kurven
- Kontrollkarten

1.6 Kommunikation

Entscheidend für die Akzeptanz PC-gesteuerter Analysensysteme ist die Möglichkeit der einfachen und kostengünstigen **Integration** in vorhandene Laborinformationssysteme, zentrale Datenbanken und Langzeit-Archivierungssysteme.

tiamo ist kommunikativ. **LIMS-Systeme** können Arbeitslisten einfach in die *tiamo*-eigene Proben-tabelle importieren und diese auch fernsteuern, und zwar ohne Zusatzmodule. In *tiamo* erzeugte Daten können neu im XML-Format exportiert werden. So ist eine einfache Anbindung an alle marktgängigen LIMS-Systeme möglich. Auch wird der Export an Langzeitarchivierungssysteme wie NuGenesis SDMS oder Scientific Software Cyberlab unterstützt.

Analysenreports können mit dem neuen **Report-Generator** einfach und flexibel erstellt werden. Der Report-Generator ermöglicht das freie Definieren von Report-Vorlagen. Somit ist es jederzeit möglich, eine oder mehrere Bestimmungen mit einem wählbaren Layout im pdf-Format oder als Papierausdruck darzustellen.

Als Besonderheit kann *tiamo* Mitteilungen, Fehlermeldungen oder Resultate aus dem Methodenablauf heraus per **E-Mail** an den Anwender senden.

Funktionsübersicht

- Import von Probedaten
- Verschiedene Datenexport-Formate, z.B. XML, CSV, SLK
- Direktexport nach NuGenesis SDMS, Scientific Software CyberLAB, etc.
- Report-Designer
- E-Mail-Funktion für Statusmeldungen, Fehlermeldungen oder Resultate
- Import von externen Messwerten

1.7 Konformität

Auch im Hinblick auf die Erfüllung von **GMP-, GLP- und FDA-Anforderungen** setzt *tiamo* neue Standards. Schon bei der Entwicklung und Programmierung der Software wurden die neuesten Qualitätsstandards und Validierungsprozeduren angewendet. *tiamo* ist konsequent auf die Erfüllung der **FDA-Vorschrift 21 CFR Part 11** und ihrer kundenspezifischen Interpretationen ausgerichtet. Ein Konformitäts-Zertifikat bestätigt dies. Eine zentrale Anwenderadministration bestimmt die Zugriffsberechtigungen auf Programmfunktionen, Methoden und Resultate, wobei beliebig viele Anwender mit frei definierbaren Zugriffsprofilen möglich sind. Der Systemadministrator hat komfortabel von jedem *tiamo*-Client aus Zugriff auf die

Anwenderverwaltung. Der Zugriff auf die Software ist passwortgeschützt und es stehen das tiamo- oder Windows-Login zur Auswahl.

Die Verwendung von **digitalen Unterschriften** gestattet es, Methoden und Resultate zu signieren. Zwei Unterschriften mit unterschiedlichen Eigenschaften sind verfügbar. Mit der ersten Unterschrift (Level 1, Review) bestätigt der Anwender, dass er die Methode korrekt programmiert bzw. die Analyse korrekt durchgeführt hat. Mit der zweiten Unterschrift (Level 2, Release) wird die Methode bzw. das Resultat freigegeben und vor weiteren Veränderungen geschützt. Somit ist es möglich, betriebseigene Workflows in tiamo abzubilden.

Sämtliche Daten sind **versionskontrolliert** verwaltet und gegen unberechtigten Zugriff, Veränderung oder Löschen in der Datenbank gesichert. Die Datenbank selber regelt den Zugriff auf die Daten im Netzwerkbetrieb und bietet Archivier- und Wiederherstellfunktionen.

Der **«Audit Trail»** protokolliert sämtliche Aktionen der Anwender sowie wichtige Systemvorgänge.

Konformitätsrelevante Eigenschaften von tiamo

- Voll auf Konformität ausgerichtete Entwicklung und Validierung
- Zentrale Anwenderverwaltung
- Detaillierte Zugriffsverwaltung
- Passwortschutz unter tiamo oder Windows
- Digitale Unterschrift auf zwei Ebenen
- Je eine Unterschrift für Methoden und Resultate
- Dokumentation aller Methoden- und Resultatänderungen («History»)
- Rückverfolgbarkeit dank detailliertem «Audit Trail»
-

1.8 Versionen

tiamo ist in **drei Verkaufsversionen** erhältlich, die sich im Umfang der Funktionalitäten unterscheiden. Ein **Upgrade** ist jederzeit möglich.

	tiamo 1.0 light	tiamo 1.0 full	tiamo 1.0 multi
Produkt	6.6056.101	6.6056.102	6.6056.103
Maximale Anzahl Geräte pro PC	2	unbegrenzt	unbegrenzt
Kompatibel mit FDA 21 CFR Part 11		●	●
Anwender-Verwaltung	●	●	●
Sicherheitseinstellungen		●	●
Rückverfolgbarkeit («Audit Trail»)		●	●
Client-Server-Support			●
Anzahl Lizenzen	1	1	3
Zusätzliche Lizenzen als Option			●
XML-Datenexport nach LIMS		●	●
Parallele Titrationsen		●	●
Upgrade möglich	●	●	

1.9 Online-Hilfe

Aufruf der Hilfe

tiamo verfügt über eine sehr umfangreiche und detaillierte Online-Hilfe, die auf den zwei verschiedene Arten aufgerufen werden kann:

- **Allgemeiner Aufruf**
Mit dem Menüpunkt **Hilfe**, **tiamo Hilfe** oder dem Symbol  wird die Online-Hilfe mit dem Thema Willkommen geöffnet. Von dort kann via **Inhalt**, **Index** oder **Suchen** zum gewünschten Thema gesprungen werden.
- **Kontext-sensitiver Aufruf**
Mit der Funktionstaste [F1] auf der Tastatur wird direkt zum Thema gesprungen, welches Informationen zu dem in *tiamo* aktivierten Element (Dialogfenster, Registerkarte) anzeigt.

Kapitel 2 Allgemeine Programmfunktionen

2.1 Programmteile

tiamo besitzt vier verschiedene Programmteile, die durch Klicken auf das entsprechende Symbol in der vertikalen Leiste am linken Rand geöffnet werden können. Das Symbol für den geöffneten Programmteil wird farbig dargestellt, die Symbole für die anderen Programmteile schwarzweiss. Die Menüs, die Symbolleisten und der Inhalt des Hauptfensters sind vom jeweils geöffneten Programmteil abhängig.

Programmteil Arbeitsplatz




- Öffnen/Schliessen von Arbeitsplätzen
- Start von Einzelbestimmungen und Bestimmungsserien
- Probentabellen
- Manuelle Bedienung von Geräten

Programmteil Datenbank



- Öffnen/Schliessen von Datenbanken
- Verwalten von Datenbanken
- Nachbearbeiten
- Erstellen von Reportvorlagen

Programmteil Methode

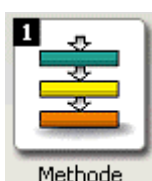

- Öffnen/Schliessen von bestehenden Methoden
- Erstellen von neuen Methoden
- Verwalten von Methoden

Programmteil Konfiguration



- Konfiguration von Geräten, Lösungen, Sensoren, Common Variablen und Rackdaten
- Sicherheitseinstellungen
- Anwenderverwaltung
- Programmadministration
- Audit Trail

Hinweis

Der Zugang zu einzelnen Programmteilen kann in der Anwenderverwaltung ausgeschaltet werden. In diesem Fall werden die entsprechenden Symbole ausgeblendet.

2.2 Anmeldung/Passwortschutz

2.2.1 Allgemeines

Anmeldung in *tiamo*

tiamo kann so konfiguriert werden, dass sich alle Anwender mit **Anwendername** und **Passwort** anmelden müssen und diese Angaben automatisch überprüft werden. Bedingung dafür ist, dass eine Anwenderverwaltung aufgebaut und die entsprechenden Sicherheitseinstellungen vorgenommen werden. Diese Daten werden in der Konfigurationsdatenbank gespeichert. Bei Client/Server-Systemen liegt diese auf dem Server und gilt global für alle Clients (zentrale Anwenderverwaltung).

FDA-konforme Einstellungen

Soll FDA-konform gearbeitet werden, müssen die Einstellungen auf der Registerkarte Anmeldung/Passwortschutz im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** gemäss 21 CFR 11 mit dem Button **[Setzen]** eingeschaltet werden. Damit werden die folgenden Bedingungen eingehalten:

- Bei jedem Programmstart ist eine **Anmeldung mit Anwendername und Passwort** erforderlich.
- Die **Passwortverwaltung** erfolgt in *tiamo*.
- **Anwendernamen** müssen **eindeutig** sein. Einmal eingegebene Anwender können nicht gelöscht werden.
- **Passwörter** müssen pro Anwender **eindeutig** sein. Keines der vom Anwender schon einmal verwendeten und abgelaufenen Passwörter darf wieder verwendet werden.
- Passwörter müssen eine **minimale Anzahl Zeichen** umfassen.
- Passwörter müssen nach einer definierten **Gültigkeitsdauer** geändert werden.
- Die **Anzahl Fehlversuche** bei der Eingabe des Passwortes ist limitiert. Wird diese Anzahl überschritten, so wird der Anwender automatisch in den Status **inaktiv** gesetzt.


Aktionen

Ist die Anmeldung eingeschaltet, können die folgenden Aktionen ausgeführt werden:

- Anmelden beim Programmstart
- Manuell abmelden
- Automatisch abmelden
- Passwort ändern

2.2.2 Anmelden

Sind die beiden Optionen **Anwendername erforderlich** und **Passwort erforderlich** in den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, erscheint bei jedem Programmstart und nach jedem Abmelden eines Anwenders das Dialogfenster **Anmelden**.

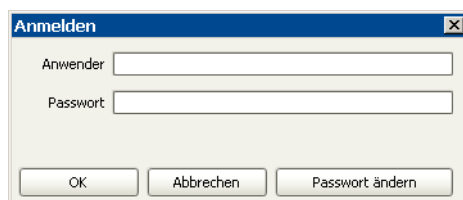

Anwender

Eingabe des Kurznamens des Anwenders.

Passwort

Eingabe des Passwortes.

Hinweis

Anwender, die sich zum erstenmal anmelden oder solche, deren Status von **inaktiv** oder **entfernt** wieder auf **aktiv** gesetzt wurde, müssen sich mit dem vom Administrator vergebenen Startpasswort anmelden. Danach wird automatisch das Fenster **Passwort ändern** geöffnet, in dem ein neues Passwort eingegeben werden muss.

Passwort ändern

Öffnet das Fenster **Passwort ändern**, in dem das neue Passwort eingegeben und bestätigt werden muss.

Abbrechen

Die Anmeldung wird abgebrochen, das Programm wird geschlossen.

2.2.3 Manuell abmelden

Ein angemeldeter Anwender kann sich jederzeit mit dem Menüpunkt **Datei, Anwender, Abmelden** abmelden. Dabei gelten die in den Sicherheitseinstellungen definierten Optionen für das Abmelden. Anschliessend an das Abmelden öffnet sich das Fenster **Anmelden**, in dem sich ein neuer Anwender anmelden kann.

2.2.4 Automatisch abmelden

Ist die automatische Abmeldung in den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, so wird der Anwender beim Ausbleiben von Bedienungsfunktionen via Tastatur oder Maus nach der definierten Wartezeit automatisch abgemeldet. Danach öffnet sich das Fenster **Anmelden**, in dem sich aber nur der gleiche Anwender wieder anmelden kann.

Hinweis

Anwender mit Administratorrechten können sich in jedem Fall anmelden, ebenfalls möglich ist ein Notstopp.


2.2.5 Passwort ändern

Passwort ändern

Diese Schaltfläche im Dialogfenster Anmelden öffnet das Fenster **Passwort ändern**, in dem das neue Passwort eingegeben und bestätigt werden muss.

Hinweis

*Das Passwort muss zwingend geändert werden, bevor die Gültigkeitsdauer (siehe Sicherheitseinstellungen - Anmeldung/Passwortschutz) des Passwortes abläuft. Für Anwender, die sich zum erstenmal anmelden oder solche, deren Status von **inaktiv** oder **entfernt** wieder auf **aktiv** gesetzt wurde, wird dieses Fenster nach der Anmeldung mit dem Startpasswort automatisch geöffnet. Sie müssen hier für **Altes Passwort** ebenfalls das vom Administrator vergebene Startpasswort eingeben.*

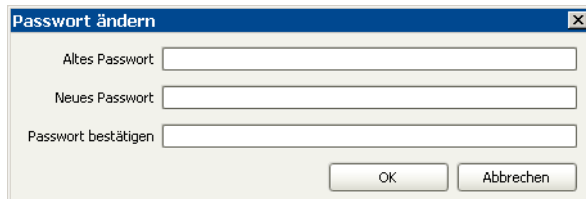

Altes Passwort

Eingabe des bisherigen Passwortes.

Neues Passwort

50 Zeichen

Eingabe des neuen Passwortes. Die Passwortoptionen sind in den Sicherheitseinstellungen auf der Registerkarte **Anmeldung/Passwortschutz** definiert.

Passwort bestätigen

50 Zeichen

Bestätigung des neuen Passwortes.

2.3 Elektronische Unterschriften

2.3.1 Regeln

Methoden und Bestimmungen können in *tiamo* in zwei Stufen **elektronisch unterschrieben** werden. Dabei gelten folgende Regeln:


- **Unterschriftsstufen**
Methoden und Bestimmungen können durch Eingabe des Anwendernamens und des Passwortes in zwei Stufen (Unterschrift Stufe 1 und Unterschrift Stufe 2) unterschrieben werden.
- **Mehrmaliges Unterschreiben**
Methoden und Bestimmungen können auf jeder Stufe mehrmals unterschrieben werden. Alle Unterschriften werden gespeichert und im Audit Trail dokumentiert.
- **Unterschreiben auf Stufe 1**
Ist auf Stufe 2 unterschrieben worden, kann nicht mehr auf Stufe 1 unterschrieben werden.
- **Unterschreiben auf Stufe 2**
Auf Stufe 2 kann erst unterschrieben werden, wenn bereits auf Stufe 1 unterschrieben wurde.
- **Unterschiedliche Anwender**
Der gleiche Anwender darf nur entweder auf Stufe 1 oder auf Stufe 2 unterschreiben.
- **Begründung und Kommentar**
Zu jeder Unterschrift gehört eine Begründung, die aus vordefinierten Standardbegründungen ausgewählt werden muss. Zusätzlich kann ein weiterer Kommentar eingegeben werden.
- **Gespeicherte Daten**
Zu jeder Unterschrift werden Unterschriftsdatum, Anwendername, Voller Name, Begründung und Kommentar gespeichert.
- **Löschen von Unterschriften 1**
Unterschriften auf Stufe 1 werden beim Erstellen einer neuen Version automatisch wieder gelöscht.
- **Löschen von Unterschriften 2**
Unterschriften auf Stufe 2 können durch den dazu berechtigten Anwender wieder gelöscht werden.
- **Methoden unterschreiben**
Methoden können immer nur einzeln unterschrieben werden.
- **Unterschriftsoptionen**
Die Optionen für Elektronische Unterschriften werden auf der Registerkarte Unterschriften im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** eingestellt.

2.3.2 Ablauf

Methoden und Bestimmungen weisen in Bezug auf Unterschriften einen der drei folgenden Zustände auf (siehe Flussdiagramm):

- **Nicht unterschrieben**
Methoden und Bestimmungen, die nicht unterschrieben sind, können gelöscht und geändert werden, wobei bei jeder Änderung eine neue Version erstellt wird.

- **Unterschieden (1)**
Beim Unterschriften von Methoden und Bestimmungen auf Stufe 1 werden keine neuen Versionen generiert. Werden auf Stufe 1 unterschriebene Methoden und Bestimmungen geändert, wird eine neue Version generiert, die keine Unterschriften mehr enthält. Auf Stufe 1 unterschriebene Methoden und Bestimmungen können gelöscht werden.
- **Unterschieden (2)**
Beim Unterschriften von Methoden und Bestimmungen auf Stufe 2 werden keine neuen Versionen generiert. Auf Stufe 2 unterschriebene Methoden und Bestimmungen können weder geändert noch gelöscht werden. Es ist aber möglich, die Unterschriften (2) zu löschen, wobei die Unterschriften (1) erhalten bleiben.

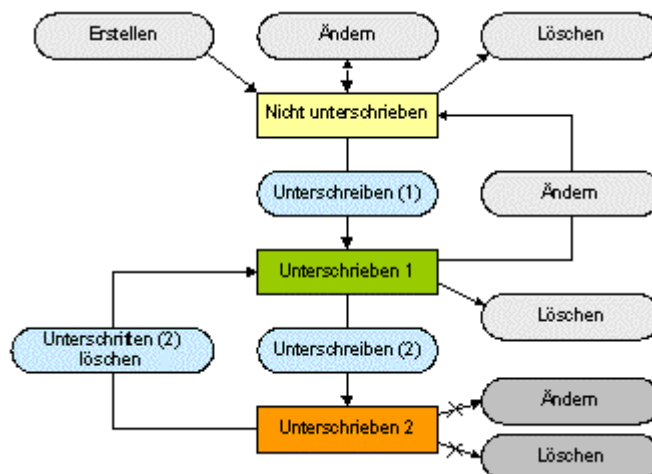

2.3.3 Unterschrift Stufe 1

Im Fenster **Unterschrift Stufe 1** können Methoden oder Bestimmungen auf Stufe 1 unterschrieben werden.

Hinweis

Methoden bzw. Bestimmungen, die auf Stufe 1 unterschrieben wurden, können geändert und gelöscht werden. Wird die geänderte Methode bzw. Bestimmung als neue Version gespeichert, werden aber alle Unterschriften automatisch gelöscht, d.h. die Methode bzw. Bestimmung muss wieder neu unterschrieben werden.

The screenshot shows a dialog box titled "Unterschrift Stufe 1". It contains the following fields and controls:

- Info:** A text box containing "Unterschrift möglich".
- Anwender:** A text input field.
- Passwort:** A text input field.
- Begründung:** A dropdown menu with "Review" selected.
- Kommentar:** A large text area.
- Buttons:** "Unterschriften" and "Schliessen" at the bottom.

Info

In diesem Feld werden Informationen zum Unterschreiben und Löschen von Unterschriften angezeigt. Möglich sind die folgenden Meldungen:

Unterschrift möglich

Die ausgewählte Methode bzw. Bestimmung kann unterschrieben werden.

Unterschrift 1 nicht möglich (Unterschrift 2 vorhanden)

Die ausgewählte Methode bzw. Bestimmung kann nicht mehr auf Stufe 1 unterschrieben werden, da sie bereits auf Stufe 2 unterschrieben wurde.

Unterschrift nicht möglich (Zugriff durch anderen Client)

Die ausgewählte Methode bzw. Bestimmung kann nicht unterschrieben werden, da sie bereits auf einem anderen Client zum Unterschreiben markiert ist.

Anwender

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Passwort

Eingabe des Passwortes.

Begründung

Auswahl aus Standardbegründungen

Auswahl aus den im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** definierten Standardbegründungen für die Kategorie **Unterschrift Stufe 1**.

Kommentar

1000 Zeichen

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Unterschreiben

Methode bzw. Bestimmung unterschreiben. Das Fenster bleibt geöffnet.

Hinweis


Methoden bzw. Bestimmungen können nur auf Stufe 1 unterschrieben werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehört, welche die entsprechende Berechtigung dazu hat (siehe Anwenderverwaltung/Anwendergruppe/Unterschriften).

2.3.4 Unterschrift Stufe 2

Im Fenster **Unterschrift Stufe 2** können Methoden oder Bestimmungen auf Stufe 2 unterschrieben werden.

Hinweis

Methoden bzw. Bestimmungen, die auf Stufe 2 unterschrieben wurden, sind **gesperrt**, d.h. sie können weder geändert noch gelöscht werden. Um solche Methoden bzw. Bestimmungen wieder bearbeiten zu können, müssen zuerst die Unterschriften auf Stufe 2 gelöscht werden (siehe Unterschrift 2 löschen).

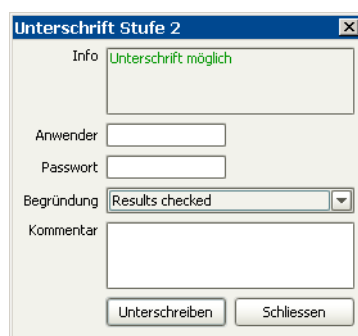

Info

In diesem Feld werden Informationen zum Unterschreiben und Löschen von Unterschriften angezeigt. Möglich sind die folgenden Meldungen:

Unterschrift möglich

Die ausgewählte Methode bzw. Bestimmung kann unterschrieben werden.

Unterschrift 2 nicht möglich (Unterschrift 1 fehlt)

Die ausgewählte Methode bzw. Bestimmung kann nicht auf Stufe 2 unterschrieben werden, da sie auf Stufe 2 noch nicht unterschrieben wurde.

Unterschrift nicht möglich (Zugriff durch anderen Client)

Die ausgewählte Methode bzw. Bestimmung kann nicht unterschrieben werden, da sie bereits auf einem anderen Client zum Unterschreiben markiert ist.

Anwender

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Passwort

Eingabe des Passwortes.

Begründung

Auswahl aus Standardbegründungen

Auswahl aus den im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** definierten Standardbegründungen für die Kategorie **Unterschrift Stufe 1**.

Kommentar

1000 Zeichen

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Unterschreiben

Methode bzw. Bestimmung unterschreiben. Das Fenster bleibt geöffnet.

Hinweis

Methoden bzw. Bestimmungen können nur auf Stufe 2 unterschrieben werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehört, welche die entsprechende Berechtigung dazu hat (siehe Anwenderverwaltung/Anwendergruppe/Unterschriften).

2.3.5 Unterschriften Stufe 2 löschen

Im Fenster **Unterschriften Stufe 2 löschen** können alle Unterschriften auf Stufe 2 für die ausgewählte Methode oder Bestimmung gelöscht werden.

Anwender

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Passwort

Eingabe des Passwortes.

Löschen


Unterschriften 2 löschen.

Hinweis

Unterschriften 2 können nur gelöscht werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehört, welche die entsprechende Berechtigung dazu hat (siehe Anwenderverwaltung/Anwendergruppe/Unterschriften).

2.4 Formel-Editor

2.4.1 Übersicht

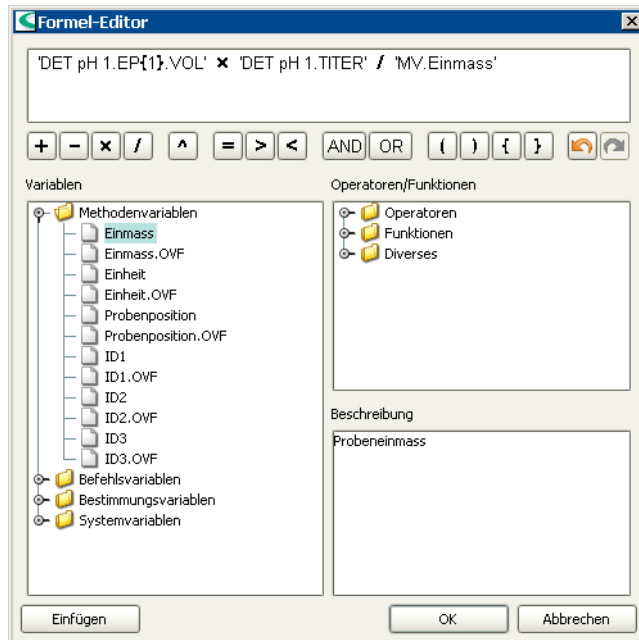

Der Formel-Editor dient zur Unterstützung bei der Eingabe von Formeln zur Resultatberechnung. Er verfügt über einen automatischen **Syntaxcheck**, der beim Übernehmen der Formel ausgelöst wird. Für die Rechenoperationen gelten die allgemeinen Prioritätsregeln (siehe *Operatoren-Funktionen - Übersicht*).

Das Dialogfenster Formel-Editor enthält die folgenden Elemente:

- **Eingabefeld**
Eingabe der Berechnungsformel.
- **Funktionsknöpfe**
Schaltflächen für die schnelle Eingabe von Operatoren und Klammern.
- **Variablen**
Auswahl der für die Berechnungsformel verfügbaren Variablen.
- **Operatoren/Funktionen**
Auswahl der für die Berechnungsformel verfügbaren Operatoren und Funktionen.
- **Beschreibung**
Beschreibung der ausgewählten Variablen, Operatoren oder Funktionen.

2.4.2 Eingabefeld

Im Eingabefeld des Formel-Editors wird die Berechnungsformel eingegeben. Für die Eingabe bestehen die folgenden Möglichkeiten:

Eingabe via Tastatur

- **Zahlen**
Zahlen sowie mathematische Funktionen können direkt via Tastatur eingegeben werden.
- **Text**
Text muss mit einem Anführungszeichen " eingeleitet und abgeschlossen werden (z.B. "meinText").
- **Variablen**
Variablen müssen mit einem Hochkomma ' eingegeben und abgeschlossen werden (z.B. 'MV.meineVariable').
- **Zeit**
Zeitangaben müssen immer mit Hilfe der Funktion **Time()** gemacht werden.

Eingabe mit Hilfe der Funktionsknöpfe

Mathematische Operatoren und Klammern können einfach mit den entsprechenden Schaltflächen in die Formel eingefügt werden. Automatisch wird vor und hinter dem Zeichen ein Leerzeichen eingefügt.

 Addition	 Logisches UND
 Subtraktion	 Logisches ODER
 Multiplikation	 Runde Klammern
 Division	 Geschweifte Klammern z.B. zur Endpunktdefinition (Beisp. 'DET pH 1.EP{1}.VOL')
 Potenzierung	 Letzte Aktion rückgängig machen
 Gleich	 Letzte Aktion wiederherstellen
 Grösser als	
 Kleiner als	

Eingabe via Auswahl

Das in den Feldern **Variablen** oder **Operatoren** ausgewählte Element kann mit Doppelklick oder  in die Formel eingefügt werden.

2.4.3 Variablen

Übersicht

Variablentypen

Folgende Arten von Variablen werden unterschieden:

Name/Syntax	Beschreibung
Methodenvariablen 'MV.Variablenname.Variablenkennzeichnung'	Methodenvariablen sind im START -Befehl definierte Variablen.
Befehlsvariablen 'Befehlsname.Variablenname'	Befehlsvariablen sind Variablen, welche von den einzelnen Befehlen im Methodenablauf erzeugt werden. Die Befehlsvariablen werden nach den im Methodenablauf ausgeführten Befehlen geordnet angezeigt.
Resultatvariablen 'RS.Resultatname.Variablenkennzeichnung'	Resultatvariablen sind spezielle Befehlsvariablen, die von CALC -Befehlen erzeugt werden und unter einer eigenen Bezeichnung verfügbar sind.
Bestimmungsvariablen 'DV.Variablenkennzeichnung'	Bestimmungsvariablen sind allgemeine Variablen und können nicht einzelnen Befehlen zugeordnet werden.
Systemvariablen 'SV.Variablenkennzeichnung'	Systemvariablen sind allgemeine Variablen und können nicht einzelnen Befehlen oder Bestimmungen zugeordnet werden.
Common Variablen 'CV.Variablenname.Variablenkennzeichnung'	Common Variablen sind methodenunabhängige Variablen, welche beim Bestimmungsstart aus der Tabelle in der Konfiguration (siehe Konfiguration - Common Variablen) übernommen werden.

Eingabe von Variablen

Variablen müssen immer mit einem Hochkomma ' eingegeben und abgeschlossen werden (z.B. 'MV.meineVariable').

Hinweis

Beachten Sie bei der Verwendung von Variablen unbedingt auch deren Datentyp (**Zahl**, **Text** oder **Datum/Zeit**).

Methodenvariablen

Methodenvariablen sind Variablen, die im **START**-Befehl von Methoden definiert sind. Dort kann auch der Datentyp (**Text**, **Zahl**, **Datum/Zeit**) der Variablen angepasst werden. Diesen Variablen können entweder Probedatenvariablen (**Einmass**, **Einheit**, **Probenposition**, **ID1...ID8**, erscheinen im Ablauffenster des Arbeitsplatzes) oder Werte zugewiesen werden. Im Feld **Variablen** des Formel-Editors werden sämtliche **Methodenvariablen**, welche für die aktuelle Methode zur Verfügung stehen, nach Befehlsname sortiert, aufgelistet.

Syntax

'MV.Variablenname.Variablenkennzeichnung'

Beispiele: 'MV.TestDatum', 'MV.RestZeit.VAL', 'MV.TestWert.OVF'

Um Syntaxfehler zu vermeiden können die Methodenvariablen im Formel-Editor unter **Variablen/Methodenvariablen** direkt ausgewählt werden.

Methodenvariablen

Kennzeichnung	Beschreibung	Befehle
.VAL	Resultatwert (fakultativ, d.h. 'RS.RS01' = 'RS.RS01.VAL') (Text , Zahl oder Datum/Zeit)	START
.OVF	Grenzüberschreitung für Methodenvariable (Zahl : 1 = Grenze überschritten , 0 = Grenze nicht überschritten)	START
In den folgenden Zeilen finden Sie die standardmässig vorhandenen Methodenvariablen (Probedaten), welche im Ablauffenster erscheinen und im START-Befehl der entsprechenden Methode editiert und gelöscht werden können.		
Einmass.VAL	Wert von 'Einmass' (Zahl)	START
Einmass.OVF	Grenzüberschreitung für 'Einmass' (Zahl)	START
Einheit.VAL	Wert von 'Einheit' (Text)	START
Einheit.OVF	Grenzüberschreitung für 'Einheit' (Zahl)	START
Probenposition.VAL	Wert von 'Probenposition' (Zahl)	START
Probenposition.OVF	Grenzüberschreitung für 'Probenposition' (Zahl)	START
ID1 (...3).VAL	Wert von 'ID1...3' (Text)	START
ID1 (...3).OVF	Grenzüberschreitung für 'ID1...3' (Zahl)	START

Befehlsvariablen

Die Verfügbarkeit der Befehlsvariablen ist abhängig von den in der Methode verwendeten Befehlen. Zu den Befehlsvariablen gehören auch Lösungs- und Sensorvariablen, die beim Bestimmungsstart für die geräteabhängigen Befehle automatisch aus den entsprechenden Tabellen in der Konfiguration übernommen und den einzelnen Befehlen zugewiesen werden. Im Feld **Variablen** des Formel-Editors werden sämtliche **Befehlsvariablen**, welche für die aktuelle Methode zur Verfügung stehen, nach Befehlsname sortiert, aufgelistet.

Syntax

'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'

Beispiele: **'DET U 3.SME'**, **'Spur 6.BSY'**, **'Liquid Handling 4.CONC'**

Um Syntaxfehler zu vermeiden können die Befehlsvariablen im Formel-Editor unter **Variablen/Befehlsvariablen** direkt ausgewählt werden.

Befehlsvariablen

Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind alle hier in alphabetischer Reihenfolge aufgelisteten Variablen vom Typ **Zahl**.

Kennzeichnung	Beschreibung	Befehle
.BLV	Blindwert des für den Befehl verwendeten Sensors (nur für ISE-Sensor) bzw. aus der Kalibrierung berechneter Blindwert (für CAL MEAS Conc)	DET U, MET U, SET U, MEAS U, MEAS Conc, CAL MEAS Conc
.BP{#}.DME	Messwertdifferenz für den Knickpunkt # (1...9)	MET
.BP{#}.ERC	ERC oder 1. Ableitung für den Knickpunkt # (1...9)	DET
.BP{#}.MEA	Messwert für den Knickpunkt # (1...9) in der Einheit des Messwertes	DET, MET, MEAS (ohne T und T/Flow)
.BP{#}.TEM	Temperatur für den Knickpunkt # (1...9) in °C	DET, MET, MEAS (ohne T und T/Flow)
.BP{#}.TIM	Zeit für den Knickpunkt # (1...9) in s	DET, MET, MEAS (ohne T und T/Flow)
.BP{#}.VOL	Volumen beim Knickpunkt # (1...9) in mL	DET, MET
.BSY	Befehlsstatus; 1 = BUSY, HOLD oder ERROR ; 0 = READY ; ungültig (Variable nicht vorhanden) = Befehl wurde noch nie gestartet	Alle
.CBY	Befehlsstatus; 1 = Konditionieren aktiv , 0 = Konditionieren nicht aktiv	SET, KFT, KFC
.COK	Befehlsstatus; 1 = Konditionierbedingung erfüllt , 0 = Konditionierbedingung nicht erfüllt	SET, KFT, KFC
.CONC	Konzentration der für den Befehl verwendeten Lösung	DET, MET, SET, KFT, ADD, LQH
.DBL	Gesamtdauer für das Abarbeiten des Befehls in s	DET, MET, SET, KFT, KFC, MEAS, CAL MEAS
.DRI	Aktuelle bzw. letzte Drift für Driftkorrektur in µL/min	SET, KFT, KFC
.DCS	Dauer für das Abarbeiten aller Startbedingungen s	DET, MET, SET, KFT
.DTI	Zeit für die Driftkorrektur (Zeit vom Start der Titration bis zum Befehlsende) in s	SET, KFT, KFC
.EGF	Letzter gemessene Gasfluss (Messwert nach Abarbeiten des Befehls) in mL/min	MEAS T/Flow
.EME	Endmesswert (Messwert nach Abarbeiten des Befehls) in der Einheit des Messwertes	DET, MET, SET, KFT, KFC, MEAS, CAL MEAS
.ENP	Elektrodennullpunkt des für den Befehl verwendeten Sensors (dimensionslos für pH-Sensor oder in mV für ISE-Sensor) bzw. aus der Kalibrierung berechneter Elektrodennullpunkt (für CAL LOOP)	DET, MET, SET, KFT, MEAS, CAL LOOP
.EP{#}.DME	Messwertdifferenz für den Endpunkt # (1...9)	MET
.EP{#}.DVT	Drift für den Endpunkt # (1...9) in µg/min	KFC
.EP{#}.ERC	ERC für den Endpunkt # (1...9)	DET
.EP.MEA	Messwert für den Endpunkt in mV	KFC
.EP{#}.MEA	Messwert für den Endpunkt # (1...9) in Einheit des Messwertes	DET, MET, SET, KFT
.EP{#}.MEP	Anzahl Endpunkte im Fenster # (1...9); 1 = 1 Endpunkt , 2 = 2 oder mehr Endpunkte	DET, MET, SET, KFT

Kennzeichnung	Beschreibung	Befehle
.EP{#}.QTY	Messwert (Wasser) für den Endpunkt # (1...9) in μg	KFC
.EP{#}.TEM	Temperatur für den Endpunkt # (1...9) in $^{\circ}\text{C}$	DET, MET, SET, KFT
.EP{#}.TIM	Dauer bis zum Erreichen des Endpunktes # (1...9) in s	DET, MET, SET, KFT, KFC
.EP{#}.VOL	Volumen für den Endpunkt # (1...9) in mL	DET, MET, SET, KFT
.ETE	Endtemperatur (Temperatur nach Abarbeiten des Befehls) in $^{\circ}\text{C}$	DET, MET, SET, KFT, KFC, MEAS (ohne T und T/Flow), CAL MEAS
.EVT	Endvolumen (total dosiertes Volumen am Ende des Befehls) in mL	DET, MET, SET, KFT
.FIN	Befehlsstatus; 1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet, 0, ungültig (Variable nicht vorhanden) = Befehl wurde noch keinmal beendet	Alle
.FP{#}.DME	Messwertdifferenz für den Fixendpunkt # (1...9)	MET
.FP{#}.MEA	Messwert für den Fixendpunkt # (1...9) in mV	KFC, MEAS (ohne T/Flow)
.FP{#}.MEA	Messwert für den Fixendpunkt # (1...9) in der Einheit des Messwertes	DET, MET, SET, KFT
.FP{#}.DVT	Drift für den Fixendpunkt # (1...9) in $\mu\text{g}/\text{min}$	KFC
.FP{#}.ERC	ERC für den Fixendpunkt # (1...9)	DET
.FP{#}.QTY	Messwert (Wasser) für den Fixendpunkt # (1...9) in μg	KFC
.FP{#}.TEM	Temperatur für den Fixendpunkt # (1...9) in $^{\circ}\text{C}$	DET, MET, SET, KFT, MEAS (ohne T und T/Flow)
.FP{#}.TIM	Zeit bis zum Erreichen des Fixendpunktes # (1...9) in s	DET, MET, SET, KFT, KFC, MEAS (ohne T/Flow)
.FP{#}.VOL	Volumen für den Fixendpunkt # (1...9) in mL	DET, MET, SET, KFT
.HP{#}.MEA	Messwert für das HNP # (1...9) in mV (HNP = Halbneutralisationspotential)	DET, MET
.HP{#}.TEM	Temperatur für das HNP # (1...9) in $^{\circ}\text{C}$	DET, MET
.HP{#}.TIM	Zeit bis zum Erreichen des HNP # (1...9) in s	DET, MET
.HP{#}.VOL	Volumen für das HNP # (1...9) in mL	DET, MET
.IGF	Initialgasfluss (Messwert beim Start des Befehls) in mL/min	MEAS T/Flow
.IME	Initialmesswert (Messwert vor Abarbeiten der Startbedingungen) in der Einheit des Messwertes	DET, MET, SET, KFT, MEAS, CAL MEAS
.ITE	Initialtemperatur (Temperatur vor Abarbeiten der Startbedingungen) in $^{\circ}\text{C}$	DET, MET, SET, KFT, MEAS (ohne T und T/Flow), CAL MEAS
.LCO	Loopzähler = aktuelle Anzahl abgeschlossener Durchläufe sowohl von Repeat- als auch von While-Schleifen	LOOP, CAL LOOP

Kennzeichnung	Beschreibung	Befehle
.LP.CA#	Berechneter Wert # (1...3) für den letzten Messpunkt	DET, MET, SET, KFT, KFC, MEAS
.LP.CHA	Ladung für den letzten Messpunkt in mA-s	KFC
.LP.DME	Messwertdifferenz für den letzten Messpunkt	MET
.LP.DVT	dV/dt für den letzten Messpunkt (SET) oder Drift für letzten Messpunkt in $\mu\text{g}/\text{min}$ (KFC)	SET, KFC
.LP.ERC	ERC für den letzten Messpunkt	DET
.LP.EX#	Externer Wert # (1...3) für den letzten Messpunkt	DET, MET, SET, KFT, KFC, MEAS
.LP.GFL	Gasflusswert für den letzten Messpunkt in mL/min	MEAS T/Flow
.LP.IGE	Aktueller Pulsstrom für den letzten Messpunkt in mA	KFC
.LP.QTY	Messwert (Wasser) für den letzten Messpunkt in μg	KFC
.LP.TEM	Temperatur für den letzten Messpunkt in $^{\circ}\text{C}$	DET, MET, SET, KFT, MEAS (ohne T und T/Flow), CAL MEAS
.LP.TIM	Zeit bis zum Erreichen des letzten Messpunktes in s	DET, MET, SET, KFT, KFC, MEAS, CAL MEAS
.LP.UGE	Spannung an der Generatorelektrode für letzten Messpunkt; 0 = nicht definiert, 1 = <14 V, 2 = 14...28 V, 3 = >28 V	KFC
.LP.VOL	Volumen für den letzten Messpunkt in mL	DET, MET, SET, KFT
.LP.MEA	Messwert für den letzten Messpunkt in der Einheit des Messwertes	DET, MET, SET, KFT, KFC, MEAS, CAL MEAS
.LPO	Aktuelle absolute Liftposition in mm (Eintrag beim Beenden des Befehls)	LIFT
.LST	Startzeit des SchleifenBefehls (Datum/Zeit)	LOOP, CAL LOOP
.MA.GFL	Maximaler Gasfluss in mL/min	MEAS T/Flow
.MA.MEA	Maximaler Messwert (U_{ind}) in mV	MEAS
.MA.MEA	Maximaler Messwert in der Einheit des Messwertes	DET, MET, SET, KFT
.MA.TEM	Temperatur für den maximalen Messwert in $^{\circ}\text{C}$	DET, MET, SET, KFT, MEAS (ohne T und T/Flow)
.MA.TIM	Zeit bis zum Erreichen des maximalen Messwertes in s	DET, MET, SET, KFT, MEAS
.MA.VOL	Volumen beim maximalen Messwert in mL	DET, MET, SET, KFT
.MI.GFL	Minimaler Gasfluss in mL/min	MEAS T/Flow
.MI.MEA	Minimaler Messwert (U_{ind}) in mV	MEAS
.MI.MEA	Minimaler Messwert in der Einheit des Messwertes	DET, MET, SET, KFT
.MI.TEM	Temperatur beim minimalen Messwert in $^{\circ}\text{C}$	DET, MET, SET, KFT, MEAS (ohne T und T/Flow)
.MI.TIM	Zeit für den minimalen Messwert in s	DET, MET, SET, KFT, MEAS

Kennzeichnung	Beschreibung	Befehle
.MI.VOL	Volumen beim minimalen Messwert in mL	DET, MET, SET, KFT
.MTE	Temperaturmessung mit Sensor; 1 = ein, 0 = aus)	DET, MET, SET, KFT, MEAS (ohne T und T/Flow), CAL MEAS
.NMP	Anzahl Messpunkte in der Messpunktliste	DET, MET, SET, KFT, KFC, MEAS, CAL MEAS
.RAN	Aktueller absoluter Drehwinkel des Racks in ° bezogen auf die Achse des ausgewählten Turms (Eintrag beim Beenden des Befehls)	MOVE
.RPO	Aktuelle Rackposition (Eintrag beim Beenden des Befehls); 0 bedeutet ' nicht definiert '	MOVE
.SAN	Aktueller absoluter Schwenkwinkel des Schwenkarms in ° (Eintrag beim Beenden des Befehls)	MOVE, SWING
.SLO	Elektrodensteilheit des für den Befehl verwendeten Sensors (in % für pH-Sensor oder mV für ISE-Sensor) bzw. aus der Kalibrierung berechnete Elektrodensteilheit (für CAL LOOP)	DET, MET, SET, KFT, MEAS, CAL LOOP
.SME	Startmesswert (Messwert nach Abarbeiten der Startbedingungen) in der Einheit des Messwertes	DET, MET, SET, KFT, KFC
.SPO	Aktuelle Externe Position (Eintrag beim Beenden des Befehls); 0 bedeutet ungültige Position	SWING
.STE	Starttemperatur (Temperatur nach Abarbeiten der Startbedingungen) in °C	DET, MET, SET, KFT, KFC
.STY	Stopptyp, mit dem der Befehl gestoppt wurde: 1 = normal ; 0 = manuell oder nach Fehler	DET, MET, SET, KFT, KFC, MEAS, CAL MEAS
.SVA	Startvolumen absolut (Volumen, das bedingt durch die Startbedingung "Startvolumen" zugegeben wurde) in mL	DET, MET, SET, KFT
.SVM	Startvolumen Messwert (Volumen, das bedingt durch die Startbedingung "Startmesswert" zugegeben wurde) in mL	DET, MET
.SVS	Startvolumen Messwert (Volumen, das bedingt durch die Startbedingung "Startsteigung" zugegeben wurde) in mL	DET, MET
.SVT	Startvolumen total (Volumen, das bedingt durch alle drei Startbedingungen zugegeben wurde) in mL	DET, MET, SET, KFT
.TITER	Titerwert der für den Befehl verwendeten Lösung	DET, MET, SET, KFT, ADD, LQH
.TOU	Timeoutstatus: 1 = Max. Wartezeit abgelaufen ; 0 = Max. Wartezeit nicht abgelaufen	RECEIVE, TRANSFER, SCAN
.VOL	Dosiertes Volumen	ADD, LQH

Resultatvariablen

Resultatvariablen sind spezielle Befehlsvariablen, die von **CALC-Befehlen** erzeugt werden. Im Feld **Variablen** des Formel-Editors werden sämtliche **Resultate**, welche für die aktuelle Methode zur Verfügung stehen, nach Resultatname sortiert, aufgelistet.

Syntax

'RS.Resultatsname.Variablenkennzeichnung'

Beispiele: **'RS.RS01.VAL'** (= **'RS.RS01'**), **'RS.testZeit.UNI'**

Um Syntaxfehler zu vermeiden können die Resultatvariablen im Formel-Editor unter **Variablen/Resultate** direkt ausgewählt werden.

Resultatvariablen

Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind alle hier in alphabetischer Reihenfolge aufgelisteten Variablen vom Typ **Zahl**.

Kennzeichnung	Beschreibung	Befehle
.VAL	Resultatwert, fakultativ, d.h. 'RS.RS01' = 'RS.RS01.VAL'	CALC
.ASD	Absolute Standardabweichung für das Resultat	CALC
.MNV	Mittelwert des Resultats	CALC
.NSR	Statistik-Istzähler für das Resultat	CALC
.NST	Statistik-Sollzähler für das Resultat	CALC
.OVF	Grenzwertüberschreitung für Resultat; 1 = Grenze überschritten, 0 = Grenze nicht überschritten	CALC
.RSD	Relative Standardabweichung für das Resultat	CALC
.STS	Statistik-Status für das Resultat; 1 = Statistik ein, 0 = Statistik aus	CALC
.UNI	Resultateinheit (Text)	CALC

Bestimmungsvariablen

Bestimmungsvariablen sind allgemeine und nicht einzelnen Befehlen zuordbare Variablen, die im Methodenablauf erzeugt werden. Im Feld **Variablen** des Formel-Editors werden alle **Bestimmungsvariablen**, welche für die aktuelle Methode zur Verfügung stehen, nach Name sortiert, aufgelistet.

Syntax

'DV.Variablenkennzeichnung'

Beispiele: **'DV.DUR'**, **'DV.STT'**

Um Syntaxfehler zu vermeiden können die Bestimmungsvariablen im Formel-Editor unter **Variablen/Bestimmungsvariablen** direkt ausgewählt werden.

Bestimmungsvariablen

Kennzeichnung	Beschreibung
.DUR	Dauer der Bestimmung in s (Zahl)
.STT	Zeitpunkt, an dem die Bestimmung gestartet wurde (Zeit/Datum)

Systemvariablen

Systemvariablen sind allgemeine, weder einzelnen Befehlen noch Bestimmungen zuordbare Variablen, die beim Bestimmungsstart in die Bestimmung übernommen werden. Im Feld **Variablen** des Formel-Editors werden sämtliche **Systemvariablen**, welche für die aktuelle Methode zur Verfügung stehen, aufgelistet.

Syntax

'SV.Variablenkennzeichnung'

Beispiele: **'SV.SIN'**, **'SV.SLI'**

Um Syntaxfehler zu vermeiden können die Systemvariablen im Formel-Editor unter **Variablen/Systemvariablen** direkt ausgewählt werden.

Systemvariablen

Kennzeichnung	Beschreibung
.ACC	Autostart-Istzähler (Zahl)
.ACE	Autostart-Sollzähler (Zahl)
.FUN	Voller Name des angemeldeten Anwenders (Text)
.REM	Anmerkung (Text)
.RUN	Probenummer (Zahl)
.SEN	Angabe, ob das Ende der Probentabelle erreicht wurde; 1 = ja, 0 = nein (Zahl)
.SIN	Angabe, ob die Bestimmung als Einzelbestimmung oder innerhalb einer Serie gestartet wurde; 1 = Einzelbestimmung, 0 = Seriebestimmung (Zahl)
.SLI	Probentabelle Ist-Zeile (Zahl)
.STA	Angabe, ob die Statistik eingeschaltet ist; 1 = ja, 0 = nein (Zahl)
.STC	Startzähler (Zahl)
.USN	Kurzname des angemeldeten Anwenders (Text)
.ORG	Methodenablauf: 1 = Originalbestimmung, 0 = Nachbearbeitung (Zahl)
.STO	Angabe, ob die Bestimmung gestoppt wurde (manueller Stopp, Stopp via SEND-Befehl, Notstopp) oder normal beendet wurde ; 1 = gestoppt, 0 = normal beendet (Zahl)

Common Variablen

Common Variablen sind globale Variablen, die beim Bestimmungsstart aus der entsprechenden Tabelle in der Konfiguration, wo die Common Variablen definiert werden können, übernommen und der Bestimmung zugewiesen werden. Im Feld **Variablen** des Formel-Editors werden sämtliche **Common Variablen**, welche zur Verfügung stehen, nach Variablenname sortiert, aufgelistet.

Syntax

'CV.Variablenname.Variablenkennzeichnung'

Beispiele: **'CV.TestDatum'**, **'CV.TestZeit.VAL'**, **'CV.DurchschnittTemp.UNI'**

Um Syntaxfehler zu vermeiden können die Common Variablen im Formel-Editor unter **Variablen/Common Variablen** direkt ausgewählt werden.

Common Variablen

Kennzeichnung	Beschreibung
.VAL	Wert der Common Variable (fakultativ, d.h. 'CV.Test.VAL' = 'CV.Test') (Text , Zahl oder Datum/Zeit)
.UNI	Einheit der Common Variable (Text)

2.4.4 Operatoren/Funktionen

Übersicht der Operatoren und Funktionen

Operatoren	Funktionen	Diverses
Arithmetik: Addition (+) Subtraktion (-) Multiplikation (*) Division (/) Potenzierung (^)	Arithmetik: Exponentialfunktion (Exp) Natürlicher Logarithmus (Ln) Dekadischer Logarithmus (Log) Quadratwurzel (Sqrt) Absolutwert (Abs) Nachkommateil (Frac) Vorkommateil (Int) Vorkommateil runden (Round) Vorzeichen (sign)	Error Case
Logik: AND OR	Datum/Zeit: Time() Time(Datum) Time(Datum + Zeit)	
Vergleich: Gleich (=) Grösser als (>) Grösser gleich (>=) Kleiner als (<) Kleiner gleich (<=) Ungleich (<>)	Typumwandlung: Zahl in Text (NumberToText) Zahl in Zeit (NumberToTime) Text in Zahl (TextToNumber) Text in Zeit (TextToTime) Zeit in Zahl (TimeToNumber) Zeit in Text (TimeToText) Text: TextPosition SubText Trim	

Prioritätsregeln der Operatoren

Die Operatoren werden in der Reihenfolge, in der sie in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet sind, ausgewertet.

	Operatoren
Arithmetik	^
	*, /
	+, -
Vergleich	<, <=, >, >=
Logik	AND, OR

Operatoren - Arithmetik

Addition

Syntax

Operand1 + Operand2

Die Operanden können entweder **direkt** oder als **Variable** eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein.

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
beide Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	1.2 + 3 = 4.2	-
Text	Text	Text	"Metrohm" + "AG" = "Metrohm AG"	Wird die maximal erlaubte Länge (65'536 Zeichen) der Zeichenkette durch die Addition der Operanden überschritten, so werden die überzähligen Zeichen vom 2. Operanden abgeschnitten.
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1998;04;06) + Time(1964;02;03) = 59300.875 (bei UTC+1)	Time() : siehe Funktion Time(Datum) Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.				
Zahl	Text	Text	1.2 + "Metrohm" = "1.2Metrohm"	-
Text	Zahl	Text	"Metrohm" + 1.2 = "Metrohm1.2"	-
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 + Time(1999;11;7) = 36472.96 (bei UTC+1)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;7) + 2.0 = 36441.92 (bei UTC+2)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Text	Zeit	Text	"Metrohm" + Time(1999;10;7) = "Metrohm1999-10-07 00:00:00 UTC+2"	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in Text umgewandelt.
Zeit	Text	Text	Time(1999;01;7) + "Metrohm" = "1999-01-07 00:00:00 UTC+1Metrohm"	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

Subtraktion

Syntax

Operand1 - Operand2

Die Operanden können entweder **direkt** oder als **Variable** eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein.

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
beide Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	1.2 - 3 = -1.8	-
Text	Text	Text	"Metrohm" - "AG" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1998;01;06) - Time(1964;12;03) = 12'087.00 (bei UTC+1)	Time() : siehe Funktion Time(Datum) Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.				
Zahl	Text	Text	1.2 - "Metrohm" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Text	Zahl	Text	"Metrohm" - 1.2 = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 - Time(1999;10;7) = -36'437.917 (bei UTC+2)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;7) - 2.5 = 36'437.917 (bei UTC+2)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Text	Zeit	Text	"Metrohm" - Time(1999;10;7) = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Text	Text	Time(1999;10;7) - "Metrohm" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.

Multiplikation

Syntax

Operand1 * Operand2

Die Operanden können entweder **direkt** oder als **Variable** eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein.

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	1.2 * 3 = 3.6	-
Text	Text	Text	"Metrohm" * "AG" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1998;05;06) * Time(1902;02;03) = 27'478'004.545 (bei UTC+1 bzw. +2 bei Sommerzeit)	Time(): siehe Funktion Time(Datum) Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.				
Zahl	Text	Text	2 * "Metrohm" = "Metrohm-Metrohm"	-
Text	Zahl	Text	"Metrohm" * 2 = "Metrohm-Metrohm"	-
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 * Time(1999;10;7) = 72'879.833 (bei UTC+2)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;7) * 2.0 = 72'879.833 (bei UTC+2)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Text	Zeit	Text	"Metrohm" * Time(1999;10;7) = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Text	Text	Time(1999;10;7) * "Metrohm" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.

Division

Syntax

Operand1 / Operand2

Die Operanden können entweder **direkt** oder als **Variable** eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein.

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	1.2 / 3 = 0.4	Operand2 darf nicht null sein!
Text	Text	Text	"Metrohm" / "AG" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Zeit	Zeit	Time(1998;04;06) / Time(1964;02;03) = 1.533 (bei UTC+1 bzw. +2 bei Sommerzeit)	Time() : siehe Funktion Time(Datum) Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.				
Zahl	Text	Text	1.2 / "Metrohm" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Text	Zahl	Text	"Metrohm" / 1.2 = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zahl	Zeit	Zahl	10'000 / Time(1999;10;7) = 0.274 (bei UTC+2)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;02;17) / 10'000 = 3.621 (bei UTC+1)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Text	Zeit	Text	"Metrohm" / Time(1999;10;7) = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Text	Text	Time(1999;10;7) / "Metrohm" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.

Potenzierung

Syntax

Operand1 ^ Operand2

Die Operanden können entweder **direkt** oder als **Variable** eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein.

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	1.2 ^ 3 = 1.728	Komplexe Ergebnisse (der Form: $a+bi$, also einem reellen und einem imaginären Bestandteil zusammengesetzt) werden als Fehler angezeigt.
Text	Text	Text	"Metrohm" ^ "AG" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Zeit	Zeit	Time(1900;01;05) ^ Time(1900;01;02) = 196.371 (bei UTC+1)	Time() : siehe Funktion Time(Datum) Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.				
Zahl	Text	Text	1.2 ^ "Metrohm" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Text	Zahl	Text	"Metrohm" ^ 1.2 = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zahl	Zeit	Zahl	1.2 ^ Time(1900;02;03) = 586.198 (bei UTC+1)	-
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;7) ^ 2.5 = 253479847878.04 (bei UTC+2)	-
Text	Zeit	Text	"Metrohm" ^ Time(1999;10;7) = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Text	Text	Time(1999;10;7) ^ "Metrohm" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.

Operatoren - Logik

AND

Syntax

Operand1 AND Operand2

Die Operanden können entweder **direkt** oder als **Variable** eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch). Folgende Fälle sind möglich:

Operand1	Operand2	Ergebnis
1	1	1
0	1	0
1	0	0
0	0	0

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	5 AND 4 --> 1 4 AND 0 --> 0	Zahlen grösser als 0 werden als 1 (wahr) interpretiert.
Text	Text	Zahl	"Metrohm" AND "AG" --> 1 "" AND "AG" --> 0	Eine leere Zeichenkette ("") wird als 0 (falsch) interpretiert, alles andere als 1 (wahr). Die erste Operation entspricht also 1 AND 1 --> 1 .
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1999;10;07) AND Time(1999;10;07) --> 1	Time(): siehe Funktion Time(Datum)
Operanden von unterschiedlichem Typ:				
Zahl	Text	Zahl	1.2 AND "1.2" --> 1 0 AND "1" --> 1 0 AND "0" --> 1 0 AND "" --> 0	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Zahl in den Typ Text umgewandelt, da eine Umwandlung von Text in Zahl nicht sinnvoll ist. Bei der zweiten Operation wird also die 0 in " 0 " umgewandelt, was dem logischen Wert 1 (wahr) entspricht, da jede nicht leere Zeichenkette als 1 interpretiert wird.
Text	Zahl	Zahl	"Metrohm" AND 1.2 --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 AND Time(1999;10;7) --> 1 0 AND Time(1999;10;07) --> 0	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in Zahl umgewandelt und sämtliche Daten ab dem 30. Dezember 1899 werden als 1 (wahr) interpretiert.
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;7) AND 2.5 --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	"Metrohm" AND Time(1999;10;7) --> 1 "" AND Time(1999;10;07) --> 0	Vor dem Ausführen der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in den Typ Text umgewandelt und jede nicht leere Zeichenkette wird als 1 (wahr) interpretiert.
Zeit	Text	Zahl	Time(1999;10;7) AND "Metrohm" --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

OR

Syntax

Operand1 OR Operand2

Die Operanden können entweder **direkt** oder als **Variable** eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch). Folgende Fälle sind möglich:

Operand1	Operand2	Ergebnis
1	1	1
0	1	1
1	0	1
0	0	0

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	5 OR 4 --> 1 4 OR 0 --> 0	Zahlen grösser als 1 werden automatisch als 1 (true) interpretiert
Text	Text	Zahl	"Metrohm" OR "AG" --> 1 "" OR "Metrohm" --> 1 "" OR "" --> 0	Eine leere Zeichenkette ("") wird als 0 (falsch) interpretiert, alles andere als 1 (wahr). Die erste Operation entspricht also 1 OR 1 --> 1
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1999;10;07) OR Time(1964;02;03) --> 1	Time(): siehe Funktion Time(Datum)
Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.				
Zahl	Text	Zahl	1.2 OR "1.2" --> 1 0 OR "" --> 1	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Zahl in den Typ Text umgewandelt, da eine Umwandlung von Text in Zahl nicht sinnvoll ist. Bei der zweiten Operation wird also die 0 in "0" umgewandelt, was dem logischen Wert 1 (wahr) entspricht, da jede nicht leere Zeichenkette als 1 interpretiert wird.
Text	Zahl	Zahl	"Metrohm" OR 1.2 --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 OR Time(1999;10;7) - -> 1 0 OR Time(1964;02;03) - -> 1	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in Zahl umgewandelt und sämtliche Daten ab dem 30. Dezember 1899 werden als 1 (wahr) interpretiert.
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;7) OR 2.5 - -> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	"Metrohm" OR Time(1999;10;7) --> 1	Vor dem Ausführen der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in den Typ Text umgewandelt und jede nicht leere Zeichenkette wird als 1 (wahr) interpretiert.
Zeit	Text	Zahl	Time(1999;10;7) OR "Metrohm" --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

Operatoren - Vergleich

Gleich

Syntax

Operand1 = Operand2

Die Operanden können entweder **direkt** oder als **Variable** eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch).

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	5 = 5 --> 1 4 = 5 --> 0	-
Text	Text	Zahl	"Metrohm" = "AG" --> 0 "aG" = "AG" --> 0	Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten wird der ASCII-Wert (see <i>ASCII table</i>) der Zeichenfolge verglichen. Achtung: Gross- und Kleinbuchstaben haben unterschiedliche Werte!
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1998;04;06) = Time(1964;02;03) --> 0	Time(): siehe Funktion Time(Datum)
Operanden von unterschiedlichem Typ:				
Zahl	Text	Zahl	1.2 = "1.2" --> 1 1.2 = "Metrohm" --> 0	Vor der Vergleichsoperation wird die Zahl in Text umgewandelt, danach werden die Texte gemäss ASCII-Tabelle verglichen.
Text	Zahl	Zahl	"Metrohm" = 1.2 --> 0	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 = Time(1999;10;07) --> 0	Vor der Vergleichsoperation wird die Datum/Zeit in Zahl umgewandelt. Bei der Durchführung der Operation wird dabei stets der exakte Wert nach dieser Umwandlung verwendet, auch wenn maximal 5 Stellen nach dem Komma angezeigt werden können (Details dazu siehe <i>Typumwandlung "TimeToNumber"</i> , Hinweis).
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;7) = 2.0 --> 0	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	"Metrohm" = Time(1999;10;07) --> 0	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in Text umgewandelt (hier also: "1999-10-07 00:00:00 UTC+2"), danach werden die Texte gemäss ASCII-Tabelle verglichen.
Zeit	Text	Zahl	Time(1999;10;07) = "Metrohm" --> 0	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

Grösser als

Syntax

Operand1 > Operand2

Die Operanden können entweder **direkt** oder als **Variable** eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch).

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	5 > 4 --> 1 4 > 5 --> 0	-
Text	Text	Zahl	"Metrohm" > "AG" --> 1 "Aarau" > "Zug" --> 0	Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten wird der ASCII-Wert (siehe ASCII-Tabelle) der Zeichenfolge verglichen. Achtung: Gross- und Kleinbuchstaben haben unterschiedliche Werte!
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1998;04;06) > Time(1964;02;03) --> 1	Time(): siehe Funktion Time(Datum)
Operanden von unterschiedlichem Typ:				
Zahl	Text	Zahl	1.2 > "Metrohm" --> 0 1.23 > "1.2" --> 1	Vor der Vergleichsoperation wird die Zahl in Text umgewandelt, danach werden die Texte gemäss ASCII-Tabelle verglichen.
Text	Zahl	Zahl	"Metrohm" > 1.2 --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 > Time(1999;10;07) --> 0	Vor dem Vergleich wird die Datum/Zeit in eine Zahl umgewandelt (siehe Typumwandlung "TimeToNumber").
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;07) > 2.0 --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	"Metrohm" > Time(1999;10;07) --> 1	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in Text umgewandelt (hier also: "1999-10-07 00:00:00 UTC+2"), danach werden die Texte gemäss ASCII-Tabelle verglichen.
Zeit	Text	Zahl	Time(1999;10;7) > "Metrohm" --> 0	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

Grösser gleich

Syntax

Operand1 >= Operand2

Die Operanden können entweder **direkt** oder als **Variable** eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch).

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	5 >= 4 --> 1 4 >= 5 --> 0	-
Text	Text	Zahl	"Metrohm" >= "AG" --> 1	Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten wird der ASCII-Wert (see <i>ASCII table</i>) der Zeichenfolge verglichen. Achtung: Gross- und Kleinbuchstaben haben unterschiedliche Werte!
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1998;04;06) >= Time(1964;02;03) --> 1	Time(): siehe Funktion Time(Datum)
Operanden von unterschiedlichem Typ:				
Zahl	Text	Zahl	1.2 >= "1.2" --> 1 1.2 >= "Metrohm" --> 0	Vor der Vergleichsoperation wird die Zahl in Text umgewandelt, danach werden die Texte gemäss ASCII-Tabelle verglichen.
Text	Zahl	Zahl	"Metrohm" >= 1.2 --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 >= Time(1999;10;07) --> 0	Vor dem Vergleich wird die Datum/Zeit in eine Zahl umgewandelt (siehe Typumwandlung "TimeToNumber").
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;07) >= 2.0 --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	"Metrohm" >= Time(1999;10;07) --> 1	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in Text umgewandelt (hier also: "1999-10-07 00:00:00 UTC+2"), danach werden die Texte gemäss ASCII-Tabelle verglichen.
Zeit	Text	Zahl	Time(1999;10;7) >= "Metrohm" --> 0	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

Kleiner als

Syntax

Operand1 < Operand2

Die Operanden können entweder **direkt** oder als **Variable** eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch).

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	5 < 4 --> 0 4 < 5 --> 1	-
Text	Text	Zahl	"Metrohm" < "AG" --> 0	Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten wird der ASCII-Wert (see <i>ASCII table</i>) der Zeichenfolge verglichen. Achtung: Gross- und Kleinbuchstaben haben unterschiedliche Werte!
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1998;04;06) < Time(1964;02;03) --> 0	Time(): siehe Funktion Time(Datum)
Operanden von unterschiedlichem Typ:				
Zahl	Text	Zahl	1.2 < "Metrohm" --> 1 1.2 < "1" --> 0	Vor der Vergleichsoperation wird die Zahl in Text umgewandelt, danach werden die Texte gemäss ASCII-Tabelle verglichen.
Text	Zahl	Zahl	"Metrohm" < 1.2 --> 0	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 < Time(1999;10;07) --> 1	Vor dem Vergleich wird die Datum/Zeit in eine Zahl umgewandelt (siehe Typumwandlung "TimeToNumber").
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;07) < 2.0 --> 0	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	"Metrohm" < Time(1999;10;07) --> 0	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in Text umgewandelt (hier also: "1999-10-07 00:00:00 UTC+2"), danach werden die Texte gemäss ASCII-Tabelle verglichen.
Zeit	Text	Zahl	Time(1999;10;7) < "Metrohm" --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

Kleiner gleich

Syntax

Operand1 <= Operand2

Die Operanden können entweder **direkt** oder als **Variable** eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch).

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	5 <= 4 --> 0 4 <= 5 --> 1	-
Text	Text	Zahl	"Metrohm" <= "AG" --> 0	Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten wird der ASCII-Wert (siehe ASCII table) der Zeichenfolge verglichen. Achtung: Gross- und Kleinbuchstaben haben unterschiedliche Werte!
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1998;04;06) <= Time(1964;02;03) --> 0	Time(): siehe Funktion Time(Datum)
Operanden von unterschiedlichem Typ:				
Zahl	Text	Zahl	2 <= "1.2" --> 0 1.2 <= "Metrohm" --> 1	Vor der Vergleichsoperation wird die Zahl in Text umgewandelt, danach werden die Texte gemäss ASCII-Tabelle verglichen.
Text	Zahl	Zahl	"Metrohm" <= 1.2 --> 0	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 <= Time(1999;10;07) --> 1	Vor dem Vergleich wird die Datum/Zeit in eine Zahl umgewandelt (siehe Typumwandlung "TimeToNumber").
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;07) <= 2.0 --> 0	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	"Metrohm" <= Time(1999;10;07) --> 0	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in Text umgewandelt (hier also: "1999.10.07"), danach werden die Texte gemäss ASCII-Tabelle verglichen.
Zeit	Text	Zahl	Time(1999;10;7) <= "Metrohm" --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

Ungleich

Syntax

Operand1 <> Operand2

Die Operanden können entweder **direkt** oder als **Variable** eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch).

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	5 <> 4 --> 1 5 <> 5 --> 0	Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten wird der ASCII-Wert (<i>siehe ASCII table</i>) der Zeichenfolge verglichen. Achtung: Gross- und Kleinbuchstaben haben unterschiedliche Werte!
Text	Text	Zahl	"Metrohm" <> "AG" --> 1	dfg
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1998;04;06) <> Time(1964;02;03) --> 1	Time(): <i>siehe Funktion</i> Time(Datum)
Operanden von unterschiedlichem Typ:				
Zahl	Text	Zahl	1.2 <> "1.2" --> 0 1.2 <> "Metrohm" --> 1	Vor der Vergleichsoperation wird die Zahl in Text umgewandelt, danach werden die Texte gemäss ASCII-Tabelle verglichen.
Text	Zahl	Zahl	"Metrohm" <> 1.2 --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 <> Time(1999;10;07) --> 1	Vor dem Vergleich wird die Datum/Zeit in eine Zahl umgewandelt (<i>siehe Typumwandlung "TimeToNumber"</i>).
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;07) <> 2.5 --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	"Metrohm" <> Time(1999;10;07) --> 1	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in Text umgewandelt (hier also: "1999-10-07 00:00:00 UTC+2"), danach werden die Texte gemäss ASCII-Tabelle verglichen.
Zeit	Text	Zahl	Time(1999;10;7) <> "Metrohm" --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

Funktionen - Arithmetik

Exponentialfunktion

Syntax

y = Exp(Zahl)

Berechnet e^{Zahl} . Andere Schreibweise für $y = e^{(\text{Zahl})}$, wobei e die Eulersche Zahl ($e = 2.71828\dots$) ist.

Parameter

Zahl Exponent

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt (siehe Typumwandlung "Text-ToNumber"). Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **"ungültig"** zurückgegeben.

Beispiele

Exp(1.5) = 4.48169

Exp('CV.DurchschnTemp') = Potenz des Exponenten (Common Variable) zur Basis e

Natürlicher Logarithmus

Syntax

y = Ln(Zahl)

Gibt den Logarithmus der eingegebenen Zahl zur Basis e zurück. Andere Schreibweise für $y = \log_e(\text{Zahl})$, wobei e die Eulersche Zahl ($e = 2.71828\dots$) ist.

Parameter

Zahl > 0

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt (siehe Typumwandlung "Text-ToNumber"). Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **"ungültig"** zurückgegeben.

Beispiele

Ln(3) = 1.09861

Ln('CV.DurchschnTemp') = Natürlicher Logarithmus des Wertes der Common Variable zur Basis e

Dekadischer Logarithmus

Syntax

y = Log(Zahl)

Gibt den Logarithmus der eingegebenen Zahl zur Basis 10 zurück. Andere Schreibweise für $y = \log_{10}(\text{Zahl})$.

Parameter

Zahl > 0

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt (siehe Typumwandlung "Text-ToNumber"). Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **"ungültig"** zurückgegeben.

Beispiele

Log(10) = 1

Log('CV.DurchschnTemp') = Dekadischer Logarithmus des Wertes der Common Variable

Quadratwurzel

Syntax

y = Sqrt(Zahl)

Gibt die Quadratwurzel der eingegebenen Zahl zurück. Andere Schreibweise für $y = \sqrt{\text{Zahl}}$ oder $y = {}^2\sqrt{\text{Zahl}}$.

Parameter

Zahl ≥ 0

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt (siehe Typumwandlung "Text-ToNumber"). Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **"ungültig"** zurückgegeben.

Beispiele

Sqrt(33) = 5.745

Sqrt('CV.DurchschnTemp') = Quadratwurzel des Wertes der Common Variable

Absolutwert

Syntax

y = Abs(Zahl)

Gibt den Absolutwert der eingegebenen Zahl zurück, also den Wert der Zahl unabhängig von ihrem Vorzeichen.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt (siehe Typumwandlung "Text-ToNumber"). Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **"ungültig"** zurückgegeben.

Beispiele

Abs(-55.3) = 55.3

Abs('CV.DurchschnTemp') = Wert der Common Variable ohne Vorzeichen

Nachkommateil

Syntax

y = Frac(Zahl)

Gibt den Nachkommateil der eingegebenen Zahl zurück.

Hinweis

*In den Resultateigenschaften unter Definition muss unbedingt die Anzahl **Dezimalstellen** des Resultates angegeben werden, da sonst der Nachkommateil nicht angezeigt werden kann.*

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt (siehe Typumwandlung "Text-ToNumber"). Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **"ungültig"** zurückgegeben.

Beispiele

Frac(-55.325) = 0.325

Frac('CV.DurchschnTemp') = Wert der Common Variable ohne Vorzeichen

Vorkommateil

Syntax

y = Int(Zahl)

Gibt den Vorkommateil der eingegebenen Zahl zurück.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt (siehe Typumwandlung "Text-ToNumber"). Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **"ungültig"** zurückgegeben.

Beispiele

Int(-55.325) = -55

Int('CV.DurchschnTemp') = Vorkommateil des Wertes der Common Variable

Vorkommateil runden

Syntax

y = Round(Zahl)

Gibt den gerundeten Wert der eingegebenen Zahl als ganze Zahl zurück.

Hinweis

Falls der zu rundende Wert genau zwischen zwei Ganzzahlen liegt, wird auf die nächste gerade Ganzzahl gerundet: 1.5 -> 2, 4.5 -> 4, 0.5 -> 0

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt (siehe Typumwandlung "Text-ToNumber"). Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **"ungültig"** zurückgegeben.

Beispiele

Round(-55.5259) = -56

Round('CV.DurchschnTemp') = Gerundeter Wert der Common Variable

Vorzeichen

Syntax

y = Sign(Zahl)

Gibt das Vorzeichen der eingegebenen Zahl zurück: **1** für eine positive Zahl, **-1** für eine negative Zahl.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt (siehe Typumwandlung "Text-ToNumber"). Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **"ungültig"** zurückgegeben.

Beispiele

Sign(-55.3) = -1

Sign(26.115) = 1

Sign('CV.DurchschnTemp') = Vorzeichen des Wertes der Common Variable

Funktionen - Datum/Zeit

Time()

Syntax

y = Time()

Gibt das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit zurück.

Parameter

keine

Rückgabewert

Aktuelles Datum und aktuelle Zeit im Format **yyyy-mm-dd hh:mm:ss UTC ±xx**

Hinweis

UTC = Universal Time Coordinated: Referenzzeit, von der die Zeiten in den verschiedenen Zeitzonen der Erde abgeleitet werden. MEZ (Mitteleuropäische Zeit) ist gleich UTC plus 1 Stunde, in der Sommerzeit UTC plus 2 Stunden.

Time(Datum)

Syntax

y = Time(year; month; day)

Gibt die eingegebenen Zahlen im Format **Datum/Zeit** zurück.

Parameter

year	00...99 oder 1000...9999
month	1...12
day	1...31

Ein Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt (siehe Typumwandlung "Text-ToNumber"). Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **"ungültig"** zurückgegeben.

Hinweise

Bei allen Parametern wird nur der ganzzahlige Anteil verwendet.

Eine Variable vom Typ **Datum/Zeit** kann hier nicht als Parameter übergeben werden.

Sowohl bei der automatischen als auch bei der expliziten Umwandlung von einer **Zeit** in den Typ **Zahl** werden die Anzahl Tage seit dem **30. Dezember 1899 um 01 Uhr** gezählt. **Achtung:** 30. Dezember 1899 01 Uhr = 0.00000 Tage, diese Zahl ist auf 5 Stellen nach dem Komma **gerundet**, eine Vergleichsoperation beispielsweise wird aber mit dem exakten Wert durchgeführt!

Rückgabewert

Datum/Zeit im Format **yyyy-mm-dd hh:mm:ss UTC ±xx**

Hinweis

UTC = Universal Time Coordinated: Referenzzeit, von der die Zeiten in den verschiedenen Zeitzonen der Erde abgeleitet werden. MEZ (Mitteleuropäische Zeit) ist gleich UTC plus 1 Stunde, in der Sommerzeit UTC plus 2 Stunden.

Beispiele

Time(2004;02;02) = 2004-02-02 00:00:00 UTC +1 (abhängig von der Systemzeit)

Time('CV.Testjahr';'CV.Testmonat';'CV.Testtag') = Datum zusammengesetzt aus den Common Variablen

Time(Datum + Zeit)

Syntax

y = Time(year; month; day; hour; minute; second)

Gibt die eingegebenen Zahlen im Format **Datum/Zeit** zurück.

Parameter

year	00...99 oder 1000...9999
month	1...12
day	1...31
hour	0...23
minute	0...59
second	0...59

Ein Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt (siehe Typumwandlung "Text-ToNumber"). Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **"ungültig"** zurückgegeben.

Hinweise

Bei allen Parametern wird nur der ganzzahlige Anteil verwendet.

Eine Variable vom Typ **Datum/Zeit** kann hier nicht als Parameter übergeben werden.

Sowohl bei der automatischen als auch bei der expliziten Umwandlung von einer **Zeit** in den Typ **Zahl** werden die Anzahl Tage seit dem **30. Dezember 1899 um 01 Uhr** gezählt. **Achtung:** 30. Dezember 1899 01 Uhr = 0.00000 Tage, diese Zahl ist auf 5 Stellen nach dem Komma **gerundet**, eine Vergleichsoperation beispielsweise wird aber mit dem exakten Wert durchgeführt!

Rückgabewert

Datum/Zeit im Format **yyyy-mm-dd hh:mm:ss UTC ±xx**

Hinweis

UTC = Universal Time Coordinated: Referenzzeit, von der die Zeiten in den verschiedenen Zeitzonen der Erde abgeleitet werden. MEZ (Mitteleuropäische Zeit) ist gleich UTC plus 1 Stunde, in der Sommerzeit UTC plus 2 Stunden.

Beispiele

Time(2004;06;02;10;30;25) = 2004-06-02 10:30:25 UTC +2 (abhängig von der Systemzeit)

Time('CV.Testjahr';'CV.Testmonat';'CV.Testtag';'CV.TestStunde';'CV.TestMin';'CV.TestSek') = Datum zusammengesetzt aus den Common Variablen

Funktionen - Typumwandlung

NumberToText

Syntax

y = NumberToText(Zahl)

Gibt die eingegebene Zahl als **Text** zurück.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden.

Beispiele

NumberToText(-55.3) = -55.3

NumberToText('CV.DurchschnTemp') = Wert der Common Variable als **Text**

NumberToTime

Syntax

y = NumberToTime(Zahl)

Gibt die eingegebene Zahl als **Datum/Zeit** zurück, wobei die Zahl als Anzahl Tage seit dem 30. Dezember 1899 um 01 Uhr interpretiert wird.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden.

Beispiele

NumberToTime(35545.526) = 1997-05-25 14:37:26 UTC+2 (abhängig von der Systemzeit)

NumberToTime(35780.55) = 1997-12-16 14:12:00 UTC+1 (abhängig von der Systemzeit)

NumberToTime('CV.TestDatum') = Wert der Common Variable als **Datum/Zeit**

TextToNumber

Syntax

y = TextToNumber(Text)

Gibt den eingegebenen Text als **Zahl** zurück.

Parameter

Text

Der Parameter darf ausschliesslich **numerische Zeichen** oder Variablen vom Typ **Text** enthalten, da sonst eine Typumwandlung nicht möglich ist. Das Resultat dieser Umwandlung bzw. der Berechnung wäre dann "**ungültig**". Zudem muss Text durch **Anführungs- und Schlusszeichen** gekennzeichnet werden.

Beispiele

TextToNumber("-55.3") = -55.3

TextToNumber('CV.DurchschnTemp') = Wert der Common Variable als **Zahl**

TextToNumber('MV.ID1') = eingegebener Text von **ID 1** als **Zahl**

TextToTime

Syntax

y = TextToTime(Text;Format)

Gibt den eingegebenen Text als **Datum/Zeit** zurück.

Parameter

Text

Der Parameter darf ausschliesslich **numerische Zeichen** oder Variablen vom Typ **Text** enthalten, da sonst eine Typumwandlung nicht möglich ist (Resultat = "**ungültig**"). Als **Trennzeichen** zwischen Jahr, Monat etc. können Sie folgende Zeichen verwenden: Schrägstrich (/), Punkt (.), Minus (-), Strichpunkt (;), Doppelpunkt (:), Leerzeichen und Komma. Die **Reihenfolge** der einzelnen Angaben können Sie selbst bestimmen, müssen diese jedoch im Parameter **Format** angeben.

Format

Gibt an, in welchem Format bzw. Reihenfolge der Text eingegeben wurde. Dieser Parameter muss mit **Anführungs- und Schlusszeichen** markiert werden und kann aus folgenden Codezeichen zusammengesetzt werden:

Zeichen	Bedeutung
y	Jahr
M	Monat
d	Tag
H	Stunde 0...23
h	Stunde AM/PM
m	Minute
s	Sekunde
a	AM/PM Markierung

Hinweis

Wenn Sie die Uhrzeit im Format **AM/PM** angeben, muss zusätzlich zum Formatierungszeichen **h** die AM/PM Markierung **a** verwendet werden (siehe erstes Beispiel unten).

Beispiele

TextToTime("2004-12-3 5:22:01 PM";"yMdhmsa") = 2004-12-03 17:22:01 UTC+1 (abhängig von der Systemzeit)

TextToTime("12-15-01 2001:3:5";"HmsyMd") = 2001-03-05 12:15:01 UTC+1 (abhängig von der Systemzeit)

TextToTime('CV.TestDatum';'CV.TestFormat') = Werte der Common Variablen im angegebenen Zeitformat

TextToTime('MV.ID1';'CV.TestFormat') = eingegebener Text von ID1 im angegebenen Zeitformat

TimeToNumber

Syntax

y = TimeToNumber(Zeit)

Gibt die eingegebene Zeit als **Zahl** zurück.

Hinweis

Sowohl bei der automatischen als auch bei der expliziten Umwandlung von einer **Zeit** in den Typ **Zahl** werden die Anzahl Tage seit dem **30. Dezember 1899 um 01 Uhr** gezählt. **Achtung:** 30. Dezember 1899 01 Uhr = 0.00000 Tage, diese Zahl ist auf 5 Stellen nach dem Komma **gerundet**, eine Vergleichsoperation beispielsweise wird aber mit dem exakten Wert durchgeführt.

Parameter

Zeit

Dieser Parameter kann entweder in Form einer Zeit-Funktionen oder als Variable vom Typ **Zeit** angegeben werden.

Beispiele

TimeToNumber(Time()) = aktuelles Datum und aktuelle Zeit dargestellt als **Zahl** (in Tagen seit Dezember 1899)

TimeToNumber(Time(1999;12;31;23;59;59)) = 36525.95832

TimeToNumber(Time('TestJahr';'TestMonat';'TestTag')) = Wert der Common Variablen als Anzahl Tage als **Zahl**

TimeToText

Syntax

y = TimeToText(Zeit)

Gibt die eingegebene Zeit als **Text** zurück.

y = TimeToText(Zeit;Format)

Gibt die eingegebene Zeit als **Text** im gewünschten Format zurück.

Parameter

Zeit

Dieser Parameter kann entweder in Form einer Zeit-Funktionen oder als Variable vom Typ **Datum/Zeit** angegeben werden.

Format

Gibt an, in welchem Format bzw. Reihenfolge die Zeit als Text ausgegeben werden soll. Dieser Parameter kann aus folgenden Codezeichen zusammengesetzt werden und muss mit **Anführungs- und Schlusszeichen** markiert werden:

Zeichen	Bedeutung	Beispiel
y	zweistellige Jahreszahl	03
yyyy	vierstellige Jahreszahl	1999
M	ein- oder zweistellige Monatszahl	4, 12
MM	zweistellige Monatszahl	04, 12
MMM	Monatsname kurz	Jul, Aug
MMMM	Monatsname	Juli, August
d	ein- oder zweistellige Tageszahl	2, 25
dd	zweistellige Tageszahl	02, 25
h	ein- oder zweistellige Stundenzahl (1...12 AM/PM)	5, 11
hh	zweistellige Stundenzahl (1...12 AM/PM)	05, 11
H	ein- oder zweistellige Stundenzahl (0...23)	8, 17
HH	zweistellige Stundenzahl (0...23)	08, 17
m	ein- oder zweistellige Minutenzahl	2, 25
mm	zweistellige Minutenzahl	02, 25
s	ein- oder zweistellige Sekundenzahl	3, 55
ss	zweistellige Sekundenzahl	03, 55
E	Wochentag kurz	Mo, Di, Mi
EEEE	Wochentag	Montag, Dienstag
D	ein-, zwei- oder dreistellige Zahl des Tages im Jahr	2, 35, 142
DD	zwei- oder dreistellige Zahl des Tages im Jahr	02, 35, 142
DDD	dreistellige Zahl des Tages im Jahr	002, 035, 142
F	einstellige Zahl des Wochentags im Monat, z.B. der 2. Montag im Mai	2
w	ein- oder zweistellige Zahl der Woche im Jahr	5, 25
ww	zweistellige Zahl der Woche im Jahr	05, 25
W	einstellige Zahl der Woche im Monat	3
a	Format AM/PM	AM, PM
'	Einleitungs- und Abschlusszeichen für die Eingabe von beliebigem Text	
"	Eingabe von '	'

Hinweis

Wenn Sie die Uhrzeit im Format **AM/PM** angeben, muss zusätzlich zum Formatierungszeichen **h** die AM/PM Markierung **a** verwendet werden (siehe erstes Beispiel unten).

Beispiele

TimeToText(Time()) = aktuelles Datum und aktuelle Zeit (System) als **Text**

TimeToText(Time(2004;05;04)) = 2004-05-04 00:00:00 UTC+2 (abhängig von der Systemzeit)

TimeToText('CV.TestZeit') = Wert der Common Variable (Typ Zeit) als **Text**

TimeToText(Time(2000;12;31);"EEEE", den 'dd'. 'MMMM' 'yyyy') = **Sonntag, den 31. Dezember 2000**

TimeToText(Time(1997;05;22);"M"/'d'/'yyyy', 'h'PM") = **5/22/1997, 12PM**

Funktionen - Text

TextPosition

Syntax

y = TextPosition(Text ; Mustertext)

Gibt den **Index** zurück, der angibt, an welcher Stelle der **Mustertext** im **Text** zum ersten Mal vorkommt. Die Nummerierung des Indexes beginnt bei **1**!

Parameter

Text

Der Parameter kann entweder **direkt** oder als **Variable** vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** angegeben werden.

Mustertext

Der Parameter kann entweder **direkt** oder als **Variable** vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** angegeben werden. Falls die Typen der beiden Parameter nicht übereinstimmen, wird jeweils der Typ von **Mustertext** in denjenigen von **Text** umgewandelt (siehe Funktionen - Typumwandlung). Falls der **Mustertext** im **Text** nicht enthalten ist, wird **"ungültig"** zurückgegeben.

Hinweis

Eingaben vom Typ **Zahl** werden immer mit einer Kommastelle versehen.

Beispiel: **TextPosition("12345";3) = ungültig**, da die 3 vor der Operation in 3.0 umgewandelt wird und dies im Text nicht enthalten ist.

Beispiele

TextPosition("Zitronensäure";"säure") = 9, ab der Indexnummer 9 kommt das Wort **"säure"** im Text vor

TextPosition("Zitronensäure";"Säure") = ungültig, das Wort **"Säure"** (gross geschrieben) kommt im Text nicht vor

TextPosition("Zitronensäure";"salz") = ungültig, das Wort **"salz"** kommt im Text nicht vor

TextPosition(Time(2004;05;05);"5") = 7

TextPosition(3362.14;"6") = 3

TextPosition('MV.ID2';"Carbonat") = Index, bei dem der Wortteil **"Carbonat"** in der ID2 das erste Mal beginnt

SubText

Syntax

y = SubText(Text ; Position ; Länge)

Gibt denjenigen Textteil aus **Text** zurück, der beim Index **Position** beginnt und die Länge **Länge** hat.

Parameter

Text

Der Parameter kann entweder **direkt als Text** oder als **Variable** vom Typ **Text** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt (siehe Typumwandlung "NumberToText" bzw. "TimeToText"). Falls diese Typumwandlung nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **"ungültig"** zurückgegeben.

Position

Die Nummerierung der **Position** beginnt bei **1**. Der Parameter kann entweder **direkt als Zahl** oder als **Variable** vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt (siehe Typumwandlung "TextToNumber"). Falls eine Typumwandlung nicht möglich ist oder die Position nicht existiert, wird als Resultat dieser Operation **"ungültig"** zurückgegeben.

Länge

Der Parameter kann entweder **direkt als Zahl** oder als **Variable** vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt (siehe Typumwandlung "TextToNumber"). Falls eine Typumwandlung nicht möglich ist oder die hier angegebene Länge grösser als die Länge des Subtextes ist, wird **"ungültig"** zurückgegeben.

Beispiele

SubText("Zitronensäure";9;5) = säure

SubText("Zitronensäure";9;6) = ungültig, ab der Position 9 sind nur noch fünf Zeichen vorhanden

SubText('MV.ID2';1;3) = die ersten drei Zeichen der Identifikation 2

Trim

Syntax

y = Trim(Text)

Gibt den **Text** ohne vor- und nachlaufende Leerzeichen zurück.

y = Trim(Text ; Mustertext)

Gibt den **Text** ohne **Mustertext** zurück.

Parameter

Text

Der Parameter kann entweder **direkt** oder als **Variable** vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** angegeben werden.

Mustertext

Der Parameter kann entweder **direkt** oder als **Variable** vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** angegeben werden. Falls die Typen der beiden Parameter nicht übereinstimmen, wird jeweils der Typ von **Mustertext** in denjenigen von **Text** umgewandelt (siehe Funktionen - Typumwandlung).

Hinweis

Eingaben vom Typ **Zahl** werden immer mit einer Kommastelle versehen.
Beispiel: **Trim("12345";3) = 12345**, da die 3 vor der Operation in 3.0 umgewandelt wird und dies im Text nicht enthalten ist.

Beispiele

Trim(" Zitronensäure ") = "Zitronensäure"

Trim("Zitronensäure";"säure") = Zitronen

Trim("Zitronensäure";"salz") = Zitronensäure

Diverse Funktionen

Case

Syntax

y = Case(Bedingung ; Wert_wahr ; Wert_falsch)

y = Case(Bedingung ; Wert_wahr ; Wert_falsch ; Wert_error)

Gibt **Wert_wahr** zurück, wenn die Bedingung wahr ist. Andernfalls wird **Wert_falsch** zurückgegeben. Tritt ein Fehler in der Bedingung auf (Resultat "ungültig"), wird **Wert_error** zurückgegeben.

Parameter

Bedingung Zahl

Hier kann eine beliebige Variable (Typ **Zahl**) eingegeben werden, oder es kann eine Vergleichs- oder Logik-Operation durchgeführt werden, deren Operatoren entweder direkt oder als Variable übergeben werden können. Diese können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit (Time())** sein.

Wert_wahr

Wenn die **Bedingung** **<> 0** ist, wird dieser Parameter als Resultat der Funktion abgespeichert.

Dieser Parameter kann entweder direkt oder als Variable übergeben werden und kann vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit (Time())** sein. Auch ganze Operationen können hier übergeben werden.

Wert_falsch

Wenn die **Bedingung** **= 0** ist, wird dieser Parameter als Resultat der Funktion abgespeichert.

Dieser Parameter kann entweder direkt oder als Variable übergeben werden und kann vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit (Time())** sein. Auch ganze Operationen können hier übergeben werden.

Wert_error

Wenn die **Bedingung** **= ungültig** ist, wird dieser Parameter als Resultat der Funktion abgespeichert.

Dieser Parameter kann entweder direkt oder als Variable übergeben werden und kann vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit (Time())** sein. Auch ganze Operationen können hier übergeben werden.

Beispiele

Case('MV.ID1' = "", "ID1 leer"; "ID1 nicht leer") = falls im Ablauffenster keine Eingabe für ID1 gemacht wurde, wird im Resultat der Text **"ID1 leer"**, ansonsten **"ID1 nicht leer"** gespeichert.

Case('DET pH 1.EP{1}.VOL'; "DET pH 1.EP{1}.VOL"; 0; 0) = Falls in der Titration **DET pH 1** ein Endpunkt gefunden wurde, bei dem das Volumen nicht 0 ist (**Wert_wahr**), wird dieses als Resultat abgespeichert. Sollte der EP1 genau bei 0 liegen, wird **0** zurückgegeben. Wenn kein Endpunkt gefunden wurde, wird ebenfalls **0** als Resultat dieser Funktion abgespeichert.

Case('RS.ZwischenRes' > 5.5; "Zwischenresultat zu hoch"; 'RS.ZwischenRes' * 26.5; "Fehler aufgetreten") = Wenn das Resultat **"ZwischenRes"** grösser als 5.5 ist, wird der Text **"Zwischenresultat zu hoch"** in das Resultat geschrieben, ansonsten wird das Zwischenresultat mit 26.5 multipliziert. Falls beim Vergleich (**'RS.ZwischenRes' > 5.5**) ein Fehler auftritt, wird **"Fehler aufgetreten"** als Resultat dieser Operation abgespeichert.

Error

Syntax

y = Error(Wert)

Gibt **+1** zurück, wenn der **Wert ungültig** (Fehler) ist oder **0** wenn der **Wert gültig** ist. Mit dieser Funktion können z.B. Variablen auf ihre Existenz bzw. Gültigkeit überprüft werden.

Parameter

Wert

Die zu testende Variable.

Beispiele

Error('RS.ZwischenRes') = 0, wenn das Zwischenresultat berechnet werden konnte, **1**, wenn das Zwischenresultat ungültig ist.

Error('DET pH 6.EP{1}.MEA') = 0, wenn die Variable für den Messwert am Endpunkt 1 existiert, **0**, wenn keine Variable für den Messwert bzw. kein EP vorhanden ist.

ASCII-Tabelle


In der folgenden Tabelle sind nur die druckbaren Zeichen aufgelistet:

ASCII-Wert (dec)	Zeichen	ASCII-Wert (dec)	Zeichen	ASCII-Wert (dec)	Zeichen
32	Leerzeichen	64	Klammeraffe (@)	96	Accent grave (`)
33	Ausrufezeichen (!)	65	A	97	a
34	Anführungszeichen (")	66	B	98	b
35	Doppelkreuz (#)	67	C	99	c
36	Dollar (\$)	68	D	100	d
37	Prozent (%)	69	E	101	e
38	kaufmänn. "und" (&)	70	F	102	f
39	Hochkomma (')	71	G	103	g
40	Klammer auf (())	72	H	104	h
41	Klammer zu ())	73	I	105	i
42	Multiplikationszeichen (*)	74	J	106	j
43	Additionszeichen (+)	75	K	107	k
44	Apostroph (')	76	L	108	l
45	Subtraktionszeichen (-)	77	M	109	m
46	Punkt (.)	78	N	110	n
47	Schrägstrich (/)	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	Doppelpunkt (:)	90	Z	122	z
59	Strichpunkt (;)	91	eckige Klammer ([])	123	geschweifte Klammer ({})
60	kleiner als (<)	92	Backslash (\)	124	senkrechter Strich ()
61	gleich (=)	93	eckige Klammer ([])	125	geschweifte Klammer ({})
62	grösser als (>)	94	Zirkumflex (^)	126	Tilde (~)
63	Fragezeichen (?)	95	Unterstrich (_)		

2.5 Editieren

2.5.1 Texteditor

Der Texteditor dient zur Eingabe von formatiertem Text in Textfeldern und wird mit der Schaltfläche  geöffnet.

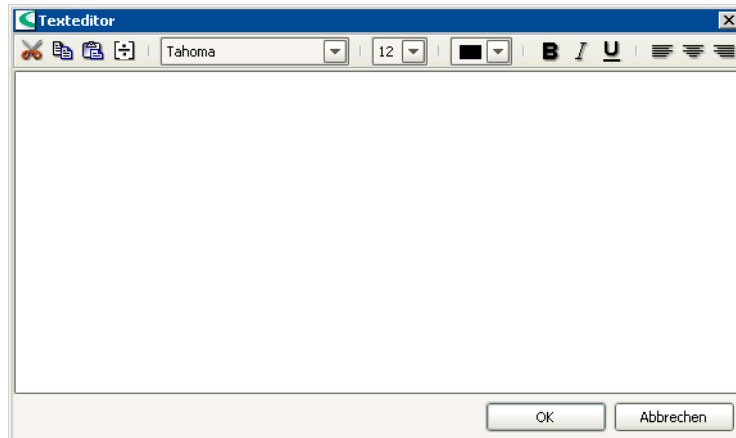

Die Symbolleiste des Texteditors enthält die folgenden Funktionen:



Ausgewählten Text ausschneiden und in Zwischenablage kopieren.



Ausgewählten Text in Zwischenablage kopieren.



Text aus Zwischenablage einfügen.



Formel-Editor für die Eingabe von Berechnungsformeln öffnen.

Hinweis

Damit Resultate von Formeln vom Typ **Datum** korrekt ausgegeben werden, müssen sie für Textfenster mit der Funktion `TimeToText()` in **Text** umgewandelt werden.



Schriftgröße in pt.



Auswahl der Schriftfarbe.



Fett.



Kursiv.



Unterstrichen.



Linksbündig.




Zentriert.



Rechtsbündig.

2.5.2 Datum wählen

Für die Eingabe eines Datums in ein Feld muss das Dialogfenster **Datum wählen** verwendet werden, das mit der Schaltfläche  geöffnet wird.

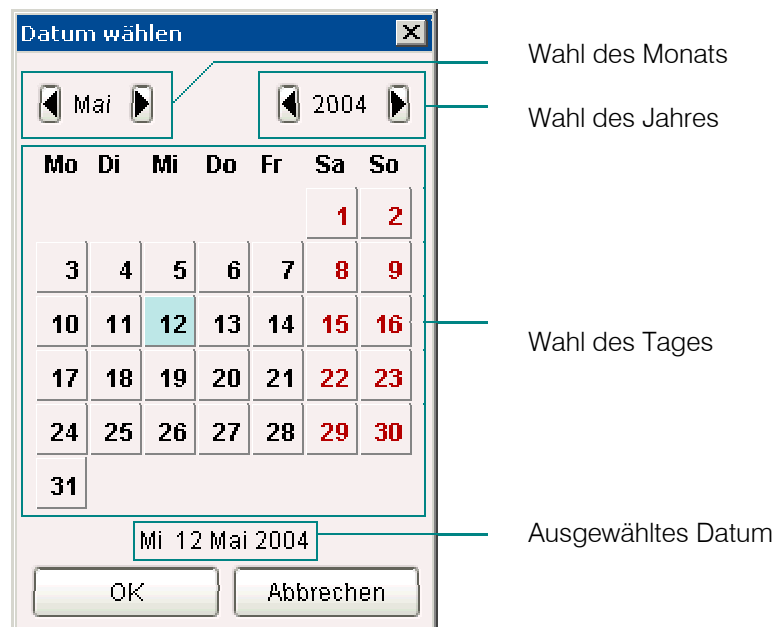

2.6 Manuelle Bedienung

2.6.1 Allgemeines

Öffnen

Die manuelle Bedienung von Geräten erfolgt im eigenständigen Dialogfenster **Manuelle Bedienung**, das von allen Programmteilen aus mit **Extras, Manuelle Bedienung** oder dem Symbol  jederzeit (auch bei laufenden Bestimmungen) aufgerufen werden kann. Das Fenster enthält in der Titelleiste die üblichen Windows-Buttons zum Schliessen, Verkleinern, Maximieren und Minimieren.

Schliessen

Das Dialogfenster **Manuelle Bedienung** kann mit **[Schliessen]** oder dem Windows-Buttons zum Schliessen geschlossen werden.


Hinweis

Die Manuelle Bedienung kann erst geschlossen werden, wenn keine manuell ausgelösten Aktionen mehr laufen.

Unterfenster

Das Dialogfenster **Manuelle Bedienung** enthält die folgenden drei Unterfenster, die durch Ziehen des Trennbalkens zwischen den Fenstern vergrößert und verkleinert werden können:

- Geräteauswahl
- Funktionen/Parameter
- Grafische Funktionsanzeige

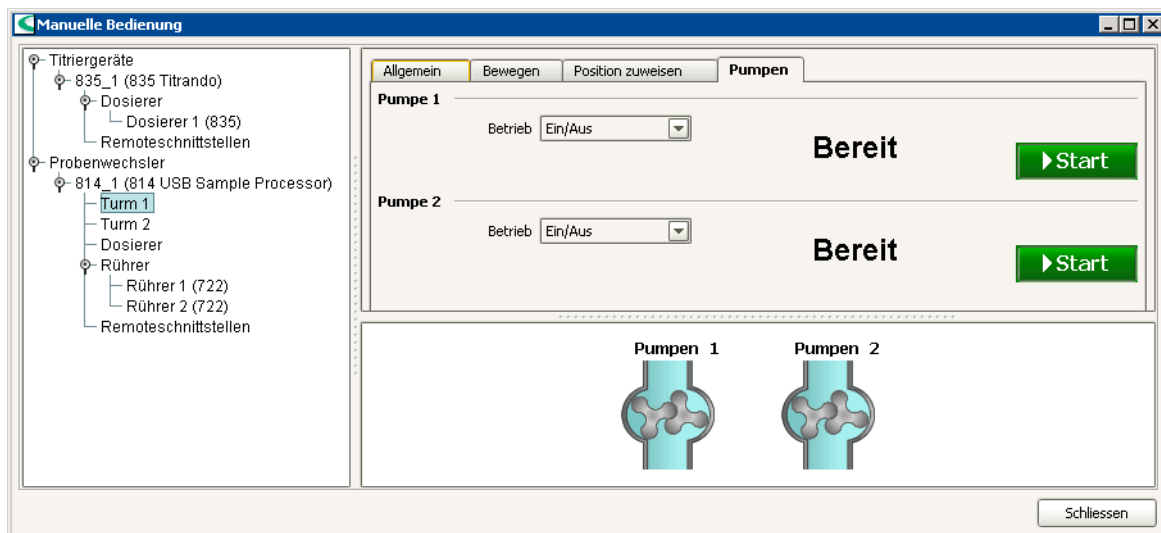

2.6.2 Geräteauswahl

Im Unterfenster für die Geräteauswahl können die Geräte bzw. Funktionseinheiten der Geräte ausgewählt werden, an denen Funktionen manuell ausgelöst werden sollen. Dazu werden diese baumartig angezeigt. Angezeigt werden alle in der Gerätetabelle konfigurierten Geräte im Status "ok" mit Gerätenamen und (in Klammern) der Nummer des Gerätetyps. Das aktuell selektierte Gerät wird mit blauem Hinter-

grund dargestellt. Geräte, bei denen noch manuell ausgelöste Aktionen ablaufen, werden mit roter Schrift dargestellt.

2.6.3 Funktionen

Im Unterfenster für Funktionen/Parameter können die Funktionen für die manuelle Bedienung des ausgewählten Gerätes sowie die dazugehörigen Parameter ausgewählt werden. Zusätzlich werden hier Messwerte für laufende Aktionen und Meldungen angezeigt.

Je nach Gerät sind folgende Funktionen möglich:

- Dosieren
- Rühren
- Remote-Funktionen
- Wechsler-Funktionen

2.6.4 Grafikanzeige

Im Unterfenster für die grafische Anzeige werden die laufenden, manuell ausgelösten Funktionen grafisch dargestellt.

2.6.5 Dosieren

Wird im Unterfenster für die Geräteauswahl die Gruppe **Dosierer** oder ein einzelner **Dosierer** ausgewählt, so erscheinen im Unterfenster für Funktionen/Parameter die mit diesen Dosierern möglichen Funktionen und Parameter.

Dosierfunktionen

Die Dosierfunktionen für Wechsel- und Dosiereinheiten werden auf den folgenden Registerkarten angezeigt:

- Allgemein
- Vorbereiten
- Füllen
- Leeren
- Fixvolumen dosieren
- Dosieren

Geräte

Die Dosier-Funktionen können mit Dosierern ausgeführt werden, die an die folgenden Geräten eingebaut oder angeschlossen sind:

Titrimo: 702, 716, 718, 719, 720, 721, 736, 751, 758, 785, 784, 785, 794, 795, 798, 799


Titrando: 808, 809, 835, 836, 841

Dosing Interface: 846

Probenwechsler: 814, 815

Allgemein

Hier werden Informationen zum ausgewählten Dosierer, der aufgesetzten Wechsel-/Dosiereinheit und der darin enthaltenen Lösung angezeigt. Diese Registerkarte erscheint nur bei der Auswahl eines einzelnen Dosierers.

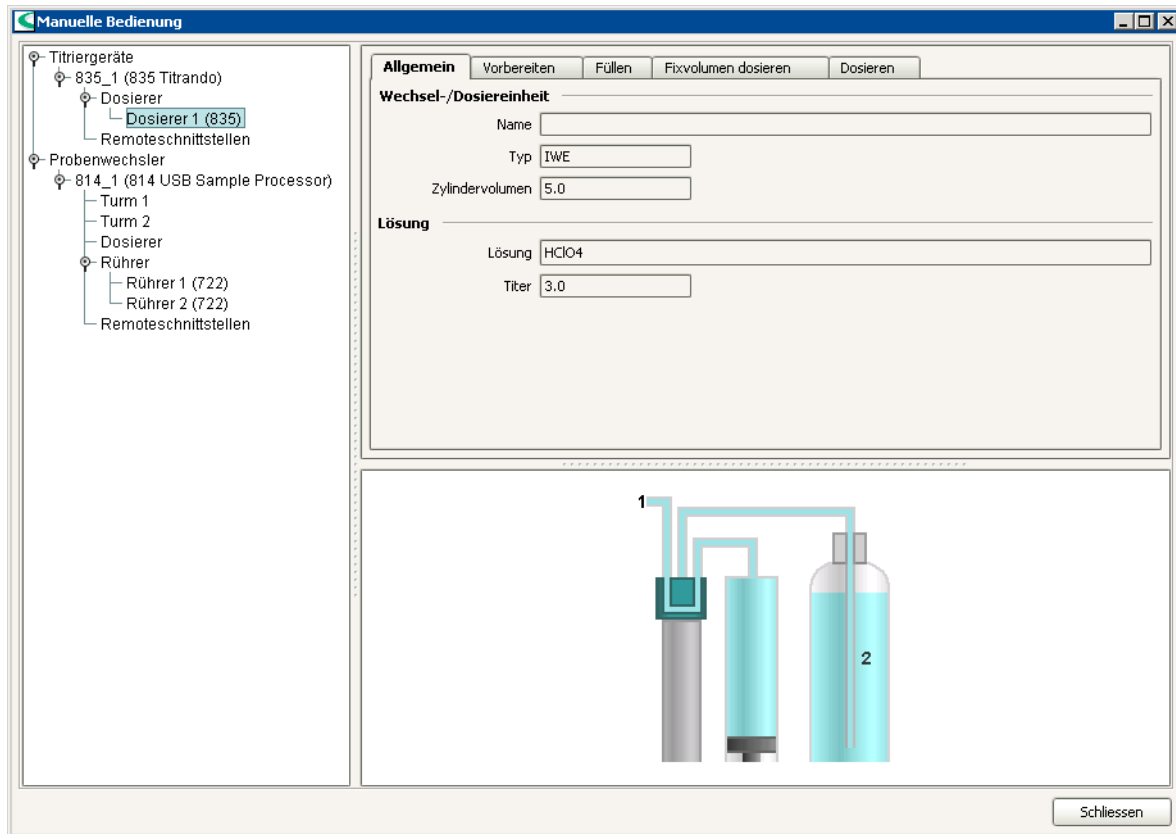

Wechsel-/Dosiereinheit

Name

Anzeige der in der Konfiguration eingegebenen Bezeichnung für die Wechseleinheit bzw. Dosiereinheit. Dieses Feld erscheint immer für intelligente Wechsel-/Dosiereinheiten. Bei nichtintelligenten Wechsel-/Dosiereinheiten wird es nur angezeigt, wenn für **Lösung** eine Lösung ausgewählt wurde.

Typ

Anzeige des Typs der auf dem Dosierer aufgesetzten Wechsel-/Dosiereinheit (**WE**, **IWE**, **DE**, **IDE**).

Zylindervolumen

Anzeige des Zylindervolumens der auf dem Dosierer aufgesetzten Wechsel-/Dosiereinheit.

Lösung

Lösung

Titriermittel/Lösung, [nicht definiert]


Auswahl der in der Lösungstabelle aufgeführten Titriermittel und Lösungen für nichtintelligente Wechsel-/Dosiereinheiten. Für intelligente Wechsel-/Dosiereinheiten wird der Name nur angezeigt.

Titer

Anzeige des Titers der aufgesetzten Lösung. Dieses Feld erscheint nur für intelligente Wechsel-/Dosiereinheiten oder wenn die Lösung für nichtintelligente Wechsel-/Dosiereinheiten ausgewählt wurde.

Vorbereiten

Hier kann das Vorbereiten von Wechsel-/Dosiereinheiten gestartet und gestoppt werden. Diese Registerkarte erscheint sowohl bei der Auswahl eines einzelnen Dosierers wie auch von allen Dosierern.

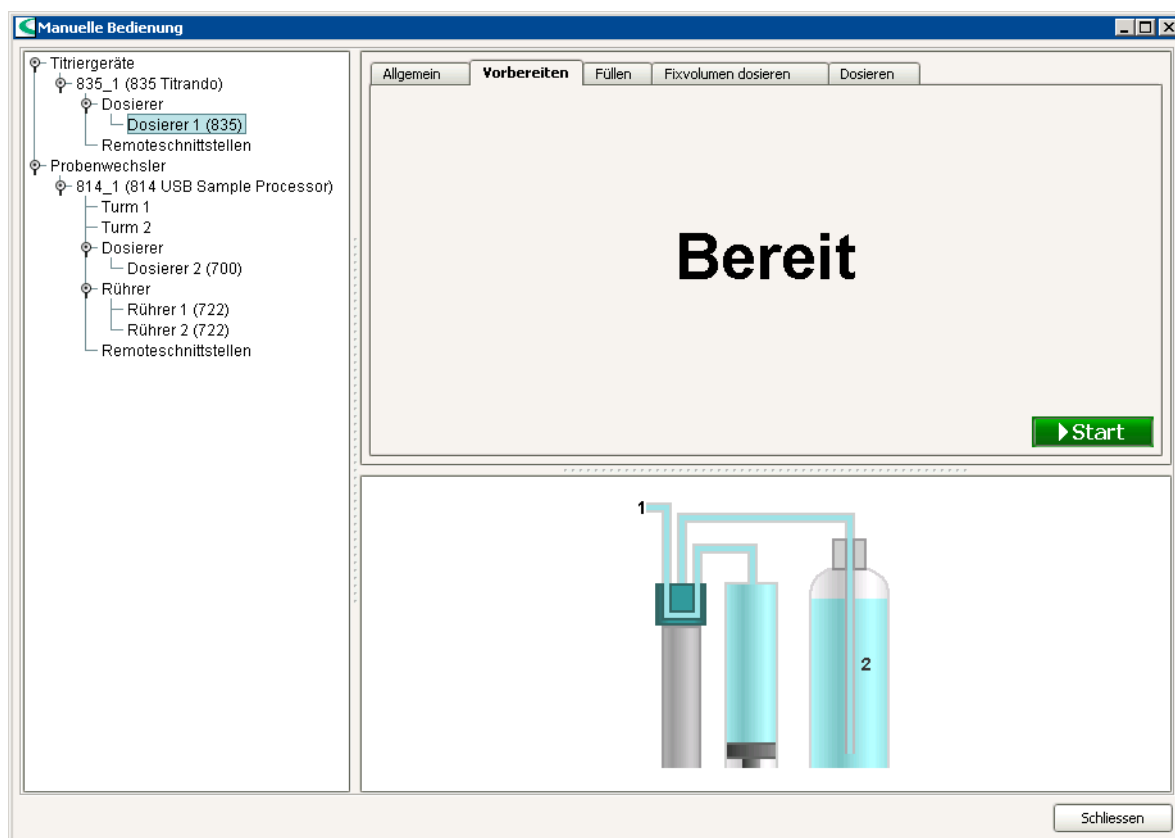


Vorbereiten für den/die ausgewählten Dosierer starten. Dabei werden die für die Wechseleinheit bzw. Dosiereinheit definierten Parameter verwendet.



Vorbereiten für den/die ausgewählten Dosierer stoppen.

Füllen

Hier kann das Füllen von Wechsel-/Dosiereinheiten gestartet und gestoppt werden. Diese Registerkarte erscheint sowohl bei der Auswahl eines einzelnen Dosierers wie auch von allen Dosierern.

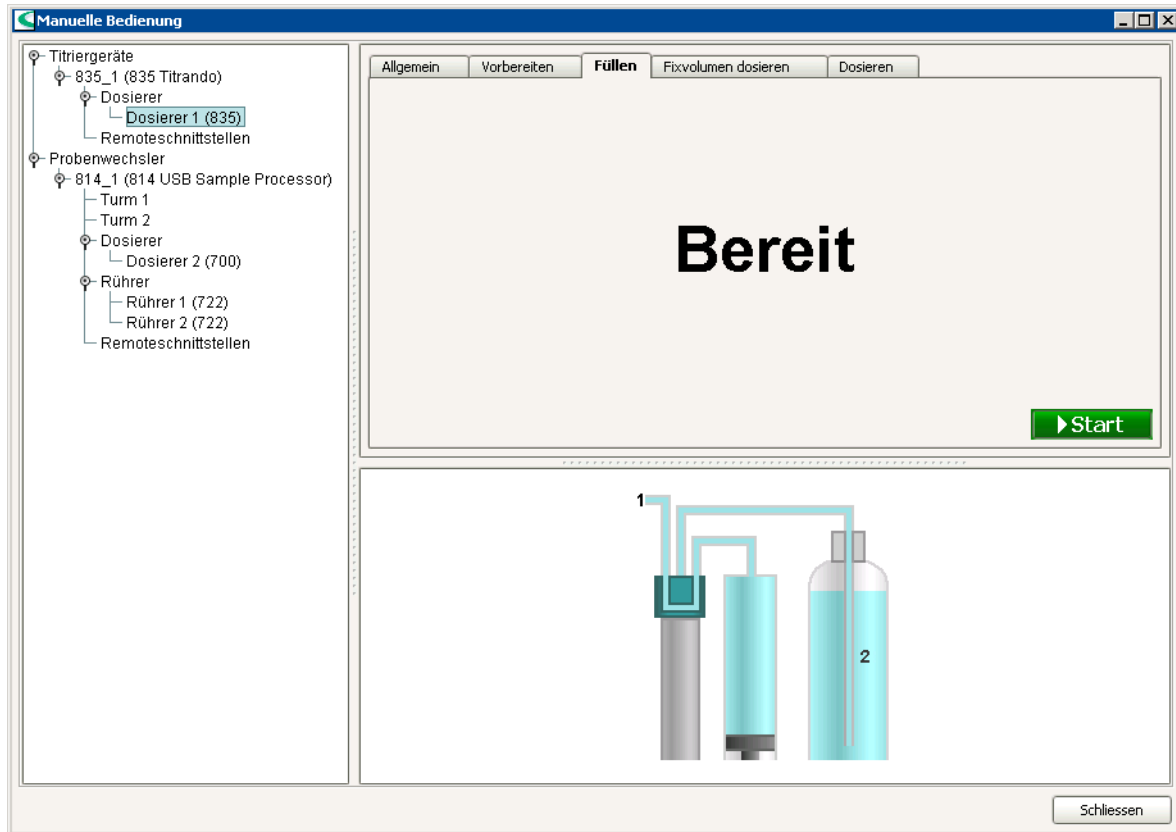

Hinweis

Füllen für Titrinos ist nur via Gerätetastatur möglich.

▶ Start


Füllen für den/die ausgewählten Dosierer starten.

■ Stop

Füllen für den/die ausgewählten Dosierer stoppen.

Leeren

Hier kann das Leeren von Dosiereinheiten gestartet und gestoppt werden. Diese Registerkarte erscheint sowohl bei der Auswahl eines einzelnen Dosierers wie auch von allen Dosierern mit Dosiereinheiten.

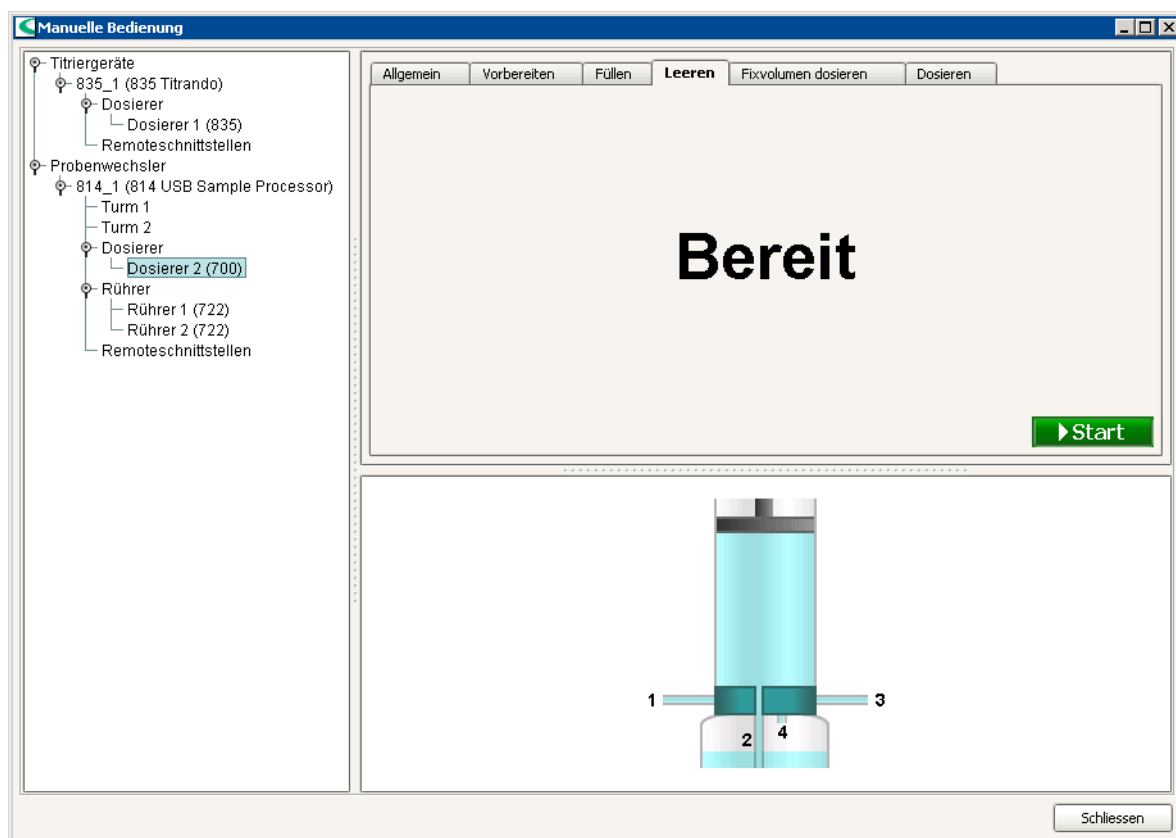


Leeren für den/die ausgewählten Dosierer starten. Dabei werden die für die Dosiereinheit definierten Parameter verwendet.



Leeren für den/die ausgewählten Dosierer stoppen.

Fixvolumen dosieren

Hier kann das Dosieren eines vorgegebenen Volumens gestartet und gestoppt werden. Diese Registerkarte erscheint nur bei der Auswahl eines einzelnen Dosierers.

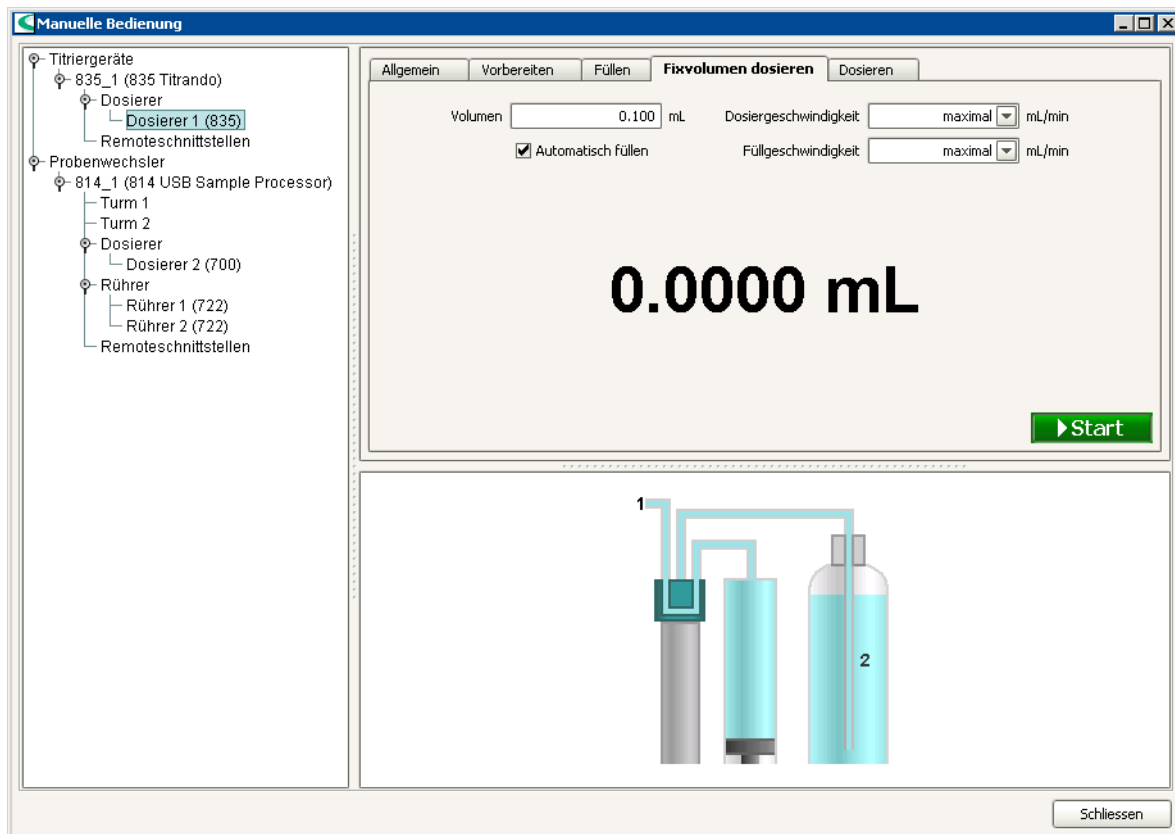

Volumen

[0.100] ... 99999.9 mL

Fixvolumen, welches dosiert werden soll.

Dosiergeschwindigkeit

[maximal]

0.01 ... 166.00 mL/min (Titrande, 814, 815)

0.01 ... 160.00 mL/min (730, 774, 778, 789)

0.01 ... 150.00 mL/min (Titrino)

Das Volumen wird mit dieser Geschwindigkeit dosiert. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab. Ist die eingegebene Dosiergeschwindigkeit für den gewählten Dosierer zu hoch, wird die Geschwindigkeit bei der Dosierung automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

Hinweis

Für viskose Flüssigkeiten sollte die Dosiergeschwindigkeit verringert werden.

Füllgeschwindigkeit

[maximal]

0.01 ... 166.00 mL/min (Titrande, 814 815)

0.01 ... 160.00 mL/min (730, 774, 778, 789)

0.01 ... 150.00 mL/min (Titrino)

Mit dieser Geschwindigkeit wird die Bürette nach der Dosierung gefüllt. Die maximale Füllgeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab. Ist die eingegebene Füllgeschwin-

digkeit für den gewählten Dosierer zu hoch, wird die Geschwindigkeit beim Füllen automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

Hinweis

Für viskose Flüssigkeiten sollte die Füllgeschwindigkeit verringert werden.

Automatisch füllen

Dieser Parameter ist nur für Geräte des Typs Titrand, Dosing Interface und USB Sample Processor sichtbar.

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird die Burette nach dem Dosieren automatisch gefüllt. Während des Füllvorganges wird die Volumenanzeige zurück auf **0.0000 mL** gesetzt. Ist diese Option ausgeschaltet, so wird das dosierte Volumen kumulativ angezeigt.

 Start

Dosieren des Fixvolumens für den ausgewählten Dosierer starten. Das dosierte Volumen wird live angezeigt.

Hinweis

Parameter, die nach dem Start des Dosierens geändert werden, gelten erst für den nächsten Dosiervorgang.

 Füllen


Füllen der Burette für den ausgewählten Dosierer starten. Diese Schaltfläche ist nur vorhanden, wenn **Automatisch füllen** ausgeschaltet ist. Während des Füllvorgangs wird die Volumenanzeige auf **0.0000 mL** gesetzt.

 Stop

Dosieren des Fixvolumens für den ausgewählten Dosierer stoppen. Wurde das Dosieren gestoppt, kann es nicht mehr fortgesetzt werden.

Dosieren

Hier kann das manuelle Dosieren gestartet und gestoppt werden. Diese Registerkarte erscheint nur bei der Auswahl eines einzelnen Dosierers und nicht für Dosiergeräte vom Typ Titrimo.

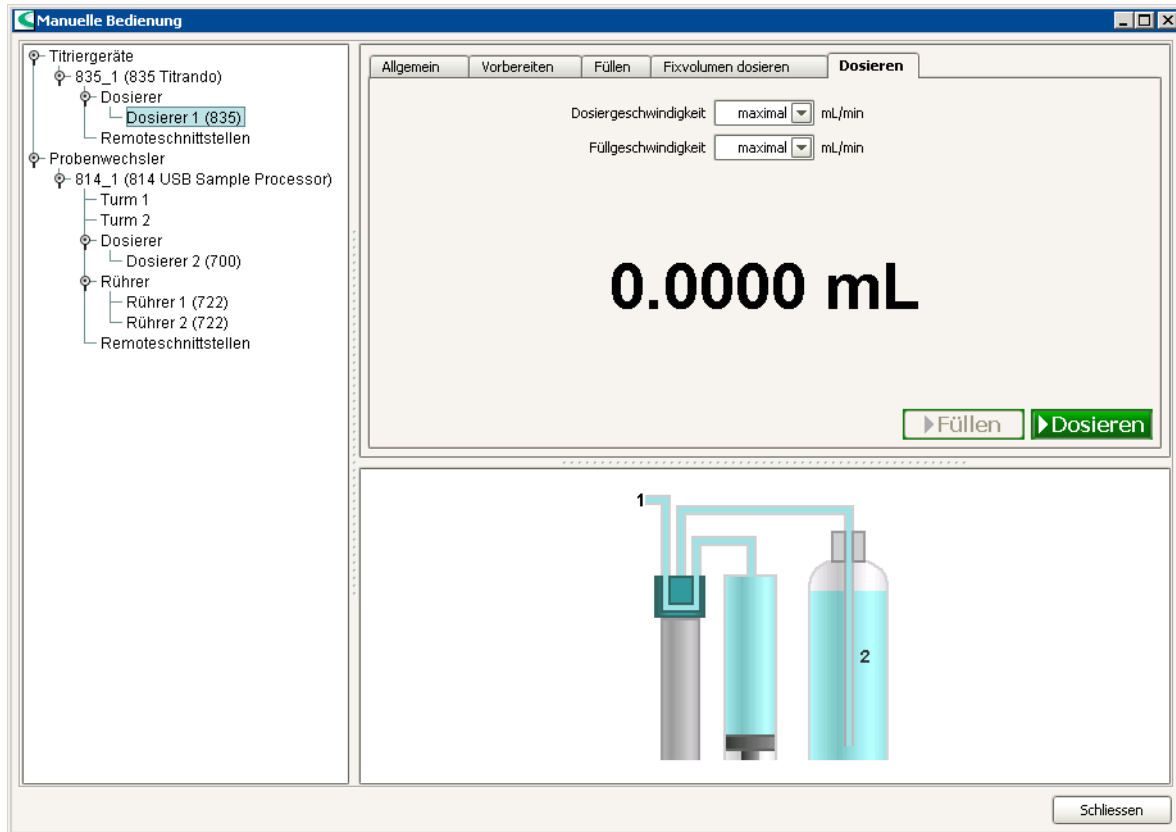

Hinweis

Manuelles Dosieren für Titrimos ist nur via Gerätetastatur möglich.

Dosiergeschwindigkeit [maximal]

0.01 ... 166.00 mL/min (Titrimo, 814 815)

0.01 ... 160.00 mL/min (778, 789)

Geschwindigkeit, mit der dosiert werden soll. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab. Ist die eingegebene Dosiergeschwindigkeit für den gewählten Dosierer zu hoch, wird die Geschwindigkeit bei der Dosierung automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

Hinweis

Für viskose Flüssigkeiten sollte die Dosiergeschwindigkeit verringert werden.

Füllgeschwindigkeit [maximal]

0.01 ... 166.00 mL/min (Titrimo, 814 815)

0.01 ... 160.00 mL/min (778, 789)

Mit dieser Geschwindigkeit wird die Burette nach der Dosierung gefüllt. Die maximale Füllgeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab. Ist die eingegebene Füllgeschwin-

digkeit für den gewählten Dosierer zu hoch, wird die Geschwindigkeit beim Füllen automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

Hinweis

Für viskose Flüssigkeiten sollte die Füllgeschwindigkeit verringert werden.

► Dosieren

Manuelles Dosieren für den ausgewählten Dosierer starten. Es wird dosiert, solange die Schaltfläche gedrückt wird. Das dosierte Volumen wird live angezeigt.

Hinweis

Parameter, die nach dem Start des Dosierens geändert werden, gelten erst für den nächsten Dosiervorgang.

► Füllen

Füllen der Bürette für den ausgewählten Dosierer starten. Während des Füllvorgangs wird die Volumenanzeige auf **0.0000 mL** gesetzt.

2.6.6 Rühren

Wird im Unterfenster für die Geräteauswahl ein via MSB oder Rühreranschluss angeschlossener Rührer ausgewählt, so erscheinen im Unterfenster für Funktionen/Parameter die mit den Rührern möglichen Funktionen und Parameter.

Rührerfunktionen

Die Rührerfunktionen werden auf den folgenden Registerkarten angezeigt:

- Ein-/Ausschalten
- Dauerbetrieb

Geräte

Die Rührer-Funktionen können mit Rührern ausgeführt werden, die an die folgenden Geräten angeschlossen sind:

Titrimo: 702, 716, 718, 719, 720, 721, 736, 751, 758, 785, 784, 785, 794, 795, 798, 799


Titrando: 808, 809, 835, 836, 841

Dosing Interface: 846

Probenwechsler: 730, 774, 778, 789, 814, 815

Ein-/Ausschalten

Hier können Rührer ein- und ausgeschaltet werden. Diese Registerkarte erscheint sowohl bei der Auswahl eines einzelnen Rührers wie auch von allen Rührern.

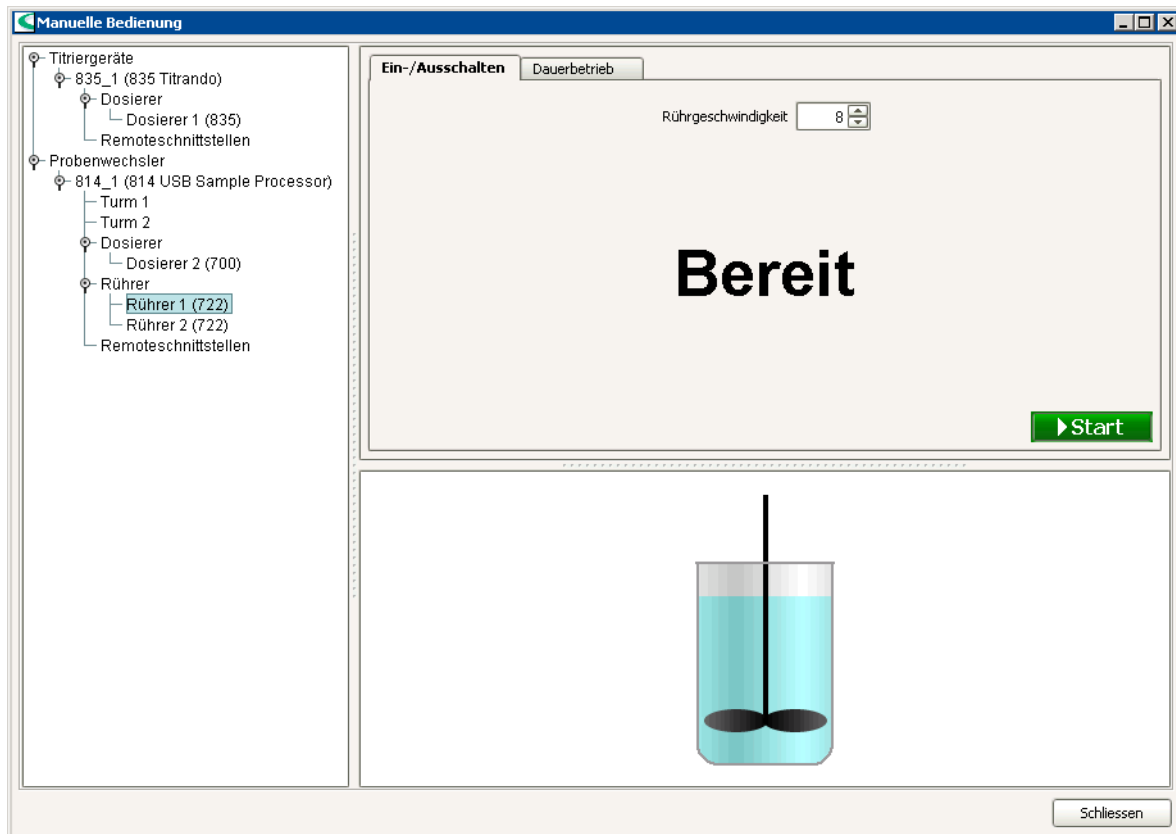

Rührgeschwindigkeit

-15 ... -1, 1 ... [8] ... 15

Auswahl der Rührergeschwindigkeit. Dieser Parameter kann auch live geändert werden.




Rühren für den ausgewählten Rührer starten.



Rühren für den ausgewählten Rührer stoppen.

Dauerbetrieb

Hier können Rührer für eine definierte Zeit eingeschaltet werden. Diese Registerkarte erscheint sowohl bei der Auswahl eines einzelnen Rührers wie auch von allen Rührern.

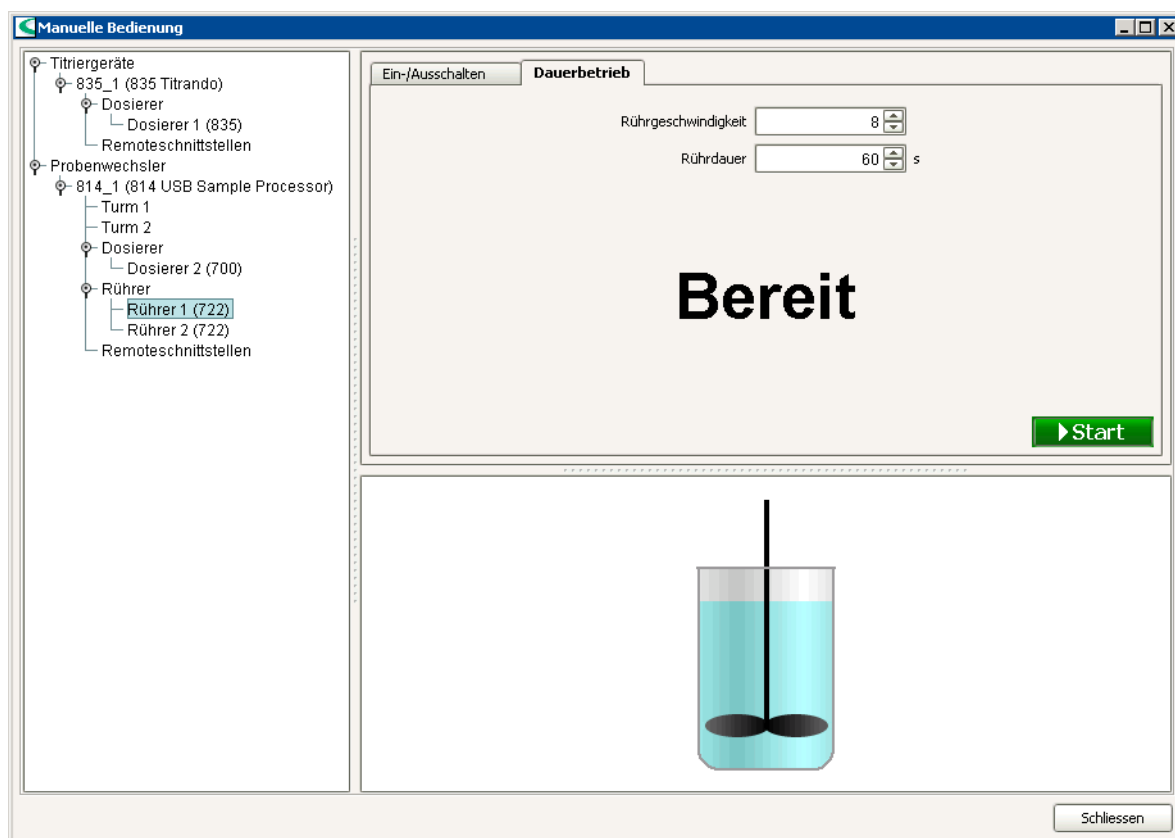

Rührgeschwindigkeit

-15 ... -1, 1 ... [8] ... 15

Auswahl der Rührergeschwindigkeit. Dieser Parameter kann auch live geändert werden.

Rührdauer

1 ... [60] ... 999999 s

Eingabe der Zeit, während der gerührt werden soll. Wird dieser Parameter nach dem Start des Rührens geändert, gilt er erst für den nächsten Rührvorgang.




Dauerbetrieb für den ausgewählten Rührer starten. In der Statusanzeige wird die noch verbleibende Zeit angezeigt. Nach Ablauf der Rührdauer wird der Rührer automatisch ausgeschaltet.



Rühren für den ausgewählten Rührer stoppen.

2.6.7 Remote-Funktionen

Wird im Unterfenster für die Geräteauswahl eine Remotebox bzw. Remote-Schnittstelle ausgewählt, so erscheinen im Unterfenster für Funktionen/Parameter die mit Elementen möglichen Funktionen und Parameter.

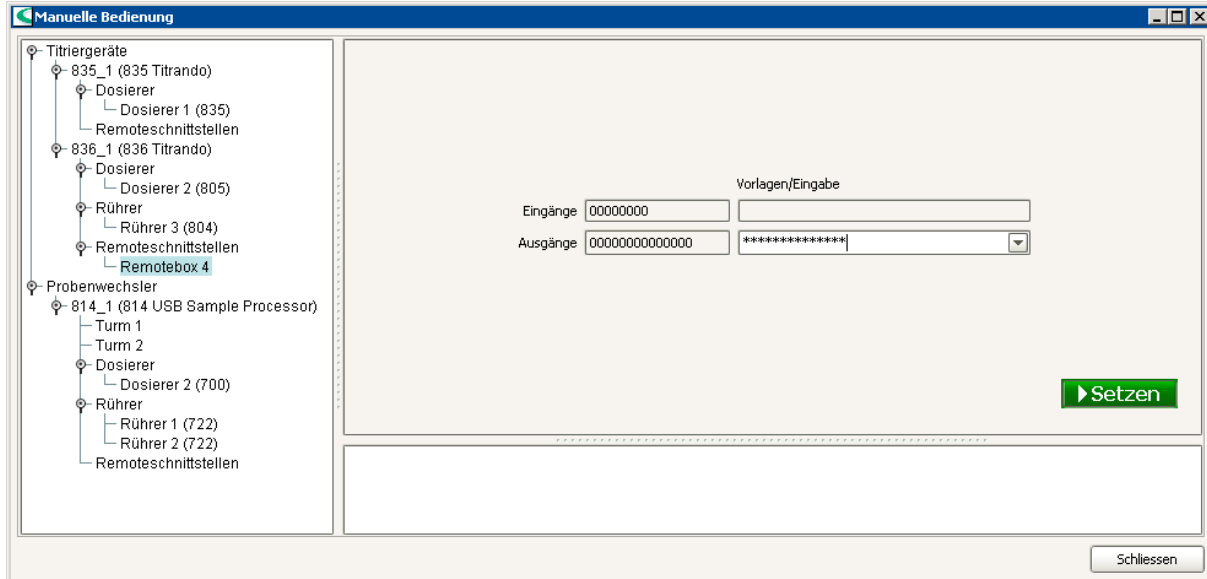

Geräte

Die Remote-Funktionen können mit den folgenden Geräten durchgeführt werden:

Titrimo: 751, 758, 784, 785, 795, 798, 799

Titrand: 808, 809, 835, 836, 841, 846

Coulometer: 756, 831

Probenwechsler: 730, 774, 778, 789, 814, 815

Eingänge

Aktueller Status

Anzeige des aktuellen Status der 8 Eingangsleitungen.

Vorlagen/Eingabe

Entspricht der aktuelle Status einer der definierten Vorlagen für die Eingänge, wird der entsprechende Name hier angezeigt.

Ausgänge

Aktueller Status

Anzeige des aktuellen Status der 14 Ausgangsleitungen.

Vorlagen/Eingabe

Bitmuster aus genau 14 Zeichen (0, 1, *, p), [***], Signalvorlage**

Eingabe des Bitmusters für das Ausgangssignal aus genau 14 Zeichen oder Auswahl einer vordefinierten Signalvorlage.

Eingegeben werden können die Zeichen

0 = Leitung inaktiv,

1 = Leitung aktiv,

***** = beliebiger Leitungszustand

p = Puls setzen (Pulslänge = 200 ms. Soll ein Puls mit einer anderen Länge ausgegeben werden, muss dafür eine entsprechende Vorlage definiert werden.)

Die Ausgangsleitungen und Bits werden dabei von rechts nach links nummeriert:

Output 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 Bit 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Beispiele:

*****1* setzt die Output-Leitung 1 auf aktiv (= gesetzt), was z. B. bei einem angeschlossenen Titrino einen Stop-Befehl bewirken würde.
 *****0* setzt die Leitung auf inaktiv.

Hinweis

*Es empfiehlt sich, die nicht relevanten Ausgangsleitungen mit einem Stern * zu maskieren, um diese Leitungszustände nicht zu verändern.*

► Setzen

Setzen des unter **Ausgänge** definierten Bitmusters.

2.6.8 Probenwechsler-Funktionen

Wird im Unterfenster für die Geräteauswahl ein Turm eines Probenwechslers ausgewählt, so erscheinen im Unterfenster für Funktionen/Parameter die mit dem Probenwechsler möglichen Funktionen und die zugehörigen Parameter.

Wechslerfunktionen

Die Funktionen für Probenwechsler werden auf den folgenden Registerkarten angezeigt:

- Allgemein
- Bewegen
- Position zuweisen
- Pumpen
- Heizung/Gas


Geräte

Die Wechsler-Funktionen können mit den folgenden Geräten durchgeführt werden:

730, 774, 778, 789, 814, 815

Allgemein

Hier werden Informationen zum aufgesetzten Rack angezeigt. Zudem können Dreh- und Liftgeschwindigkeit für die manuelle Wechslersteuerung eingestellt werden.

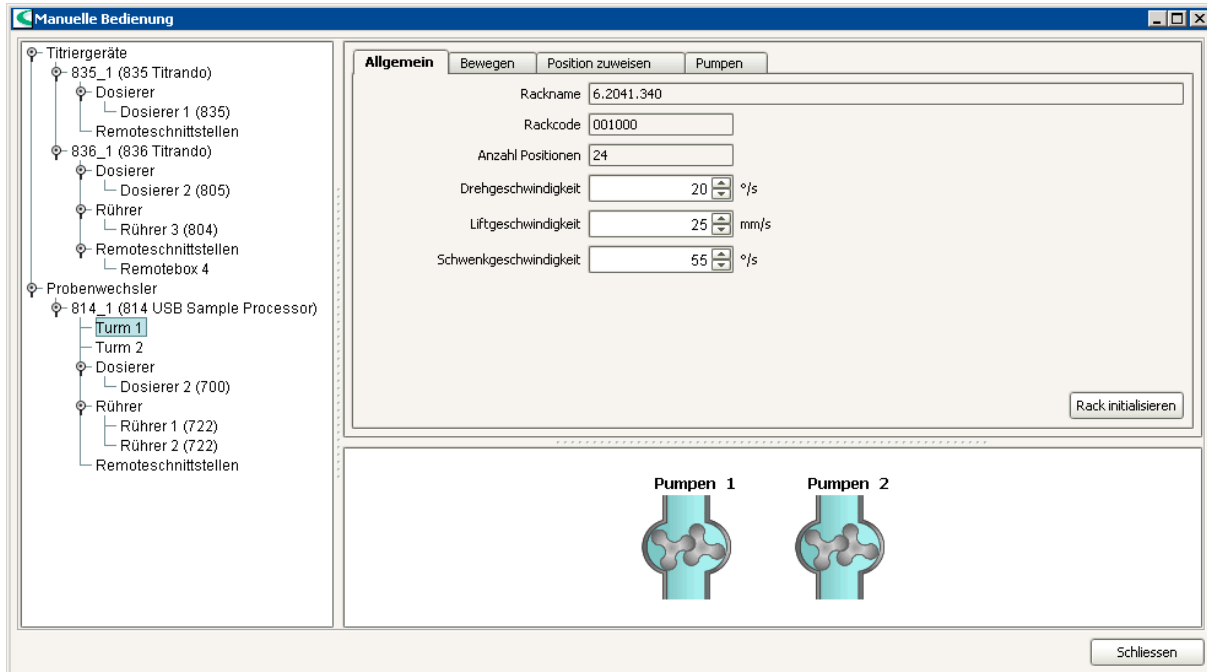

Rackname

Anzeige des Namens des aufgesetzten Racks. Ist kein Rack aufgesetzt, wird ----- angezeigt.

Rackcode

Anzeige des Rackcodes des aufgesetzten Racks. Ist kein Rack aufgesetzt, wird ----- angezeigt.

Anzahl Positionen

Anzeige der Anzahl Positionen des aufgesetzten Racks. Ist kein Rack aufgesetzt, wird ----- angezeigt.

Drehgeschwindigkeit

5 ... [20] °/s

Drehgeschwindigkeit für die manuelle Bedienung des Probenwechslers.

Liftgeschwindigkeit

3 ... [25] mm/s

Liftgeschwindigkeit für die manuelle Bedienung am ausgewählten Turm.

Schwenkgeschwindigkeit

10 ... [55] °/s

Schwenkgeschwindigkeit für die manuelle Bedienung des Swing Heads am Probenwechsler.

Rack initialisieren

Das aufgesetzte Rack wird initialisiert. Während der Initialisierung erscheint der Cursor als Sanduhr.


Hinweis

Beim Initialisieren des Racks werden folgende Aktionen durchgeführt:

- Rack in Position drehen, um Rackcode auszulesen.
- Rackdaten zum Rackcode in den Probenwechsler übertragen.
- Lifte auf 0 mm hochfahren.
- Schwenkarm zurückfahren.

Bewegen

Hier kann das Anfahren der gewünschten Rack-, Lift- oder Schwenkarmposition manuell ausgelöst werden.

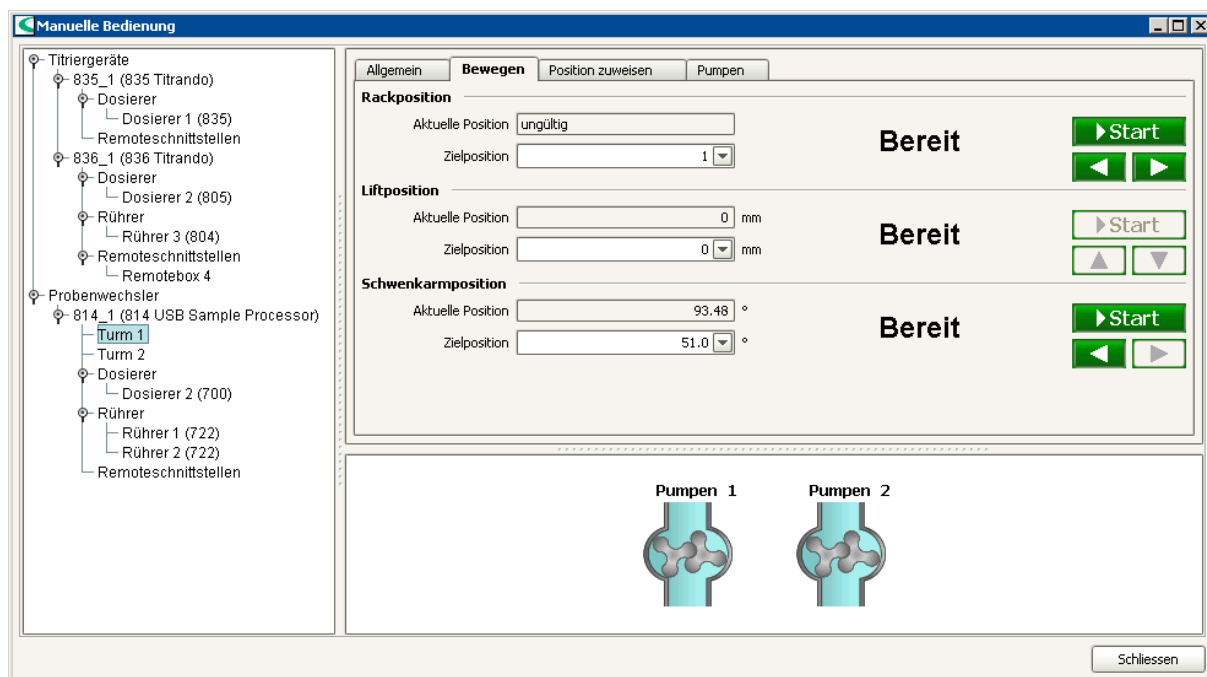

Rackposition

Rackposition einstellen.

Aktuelle Position

Anzeige der aktuellen Rackposition.

Zielposition

[1] ... n (abhängig vom Rack), **Spezialbecher 1...16**

Auswahl oder Eingabe der Rackposition, die angefahren werden soll.



Anfahren der Zielposition starten. Nach dem Start wechselt die Schaltfläche auf **[Stop]**, die beiden unteren Schaltflächen werden inaktiv (grau) dargestellt, und als Statusmeldung erscheint **Bewegen...** anstelle von **Bereit**.



Aktuelle Rackposition – 1 anfahren.



Aktuelle Rackposition + 1 anfahren.

Liftposition

Liftposition für den ausgewählten Turm einstellen.

Aktuelle Position

Anzeige der aktuellen Liftposition in mm.

Zielposition

[0] ... 235 mm, **Ruheposition**, **Arbeitsposition**, **Drehposition** (nur für normale Becher und ext. Pos.), **Spülposition** (nur für normale Becher und ext. Pos.), **Spezialposition** (nur für normale Becher und ext. Pos.)

Auswahl oder Eingabe der Liftposition, die für die aktuelle Rackposition (normale Becher, Spezialbecher, Externe Position) angefahren werden soll.



Anfahren der Zielposition starten. Anfahren der Zielposition starten. Nach dem Start wechselt die Schaltfläche auf **[Stop]**, die beiden unteren Schaltflächen werden inaktiv (grau) dargestellt, und als Statusmeldung erscheint **Bewegen...** anstelle von **Bereit**.



Lift nach oben bewegen, solange diese Taste gedrückt wird.



Lift nach unten bewegen, solange diese Taste gedrückt wird.

Schwenkarmposition

Position (Winkel) des Schwenkarms am ausgewählten Turm einstellen.

Aktuelle Position

Anzeige der aktuellen Position des Schwenkarms in °.

Zielposition

[0.0] ...330.0 °, Extern 1...4

Auswahl oder Eingabe der Schwenkarmposition, die angefahren werden soll.



Anfahren der Zielposition starten. Nach dem Start wechselt die Schaltfläche auf **[Stop]**, die beiden unteren Schaltflächen werden inaktiv (grau) dargestellt, und als Statusmeldung erscheint **Bewegen...** anstelle von **Bereit**.




Schwenkarm nach links (gegen **0°**) bewegen, solange diese Taste gedrückt wird.



Schwenkarm nach rechts (gegen **330°**) bewegen, solange diese Taste gedrückt wird.

Position zuweisen

Hier kann die aktuelle Rack-, Lift- oder Schwenkarmposition einer bestimmten Spezialposition zugewiesen werden.

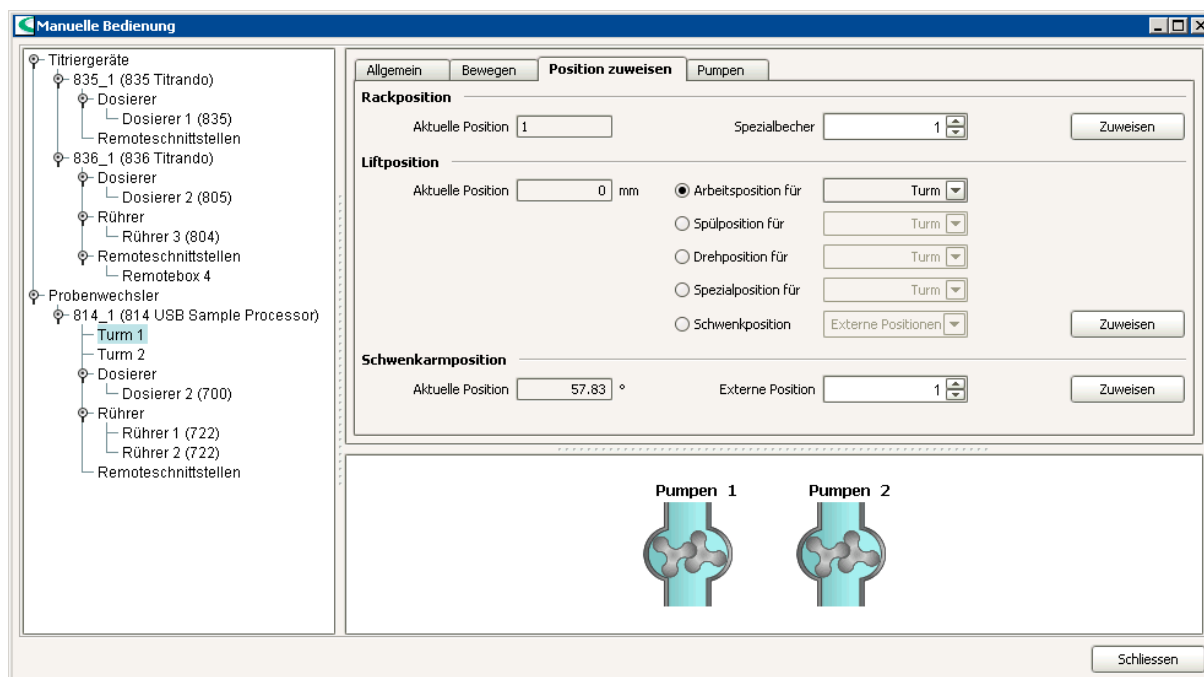

Rackposition

Aktuelle Rackposition einem bestimmten Spezialbecher zuweisen.

Aktuelle Position

Anzeige der aktuellen Rackposition.

Spezialbecher

[1] ... 16

Auswahl des Spezialbechers, dem die aktuelle Rackposition zugewiesen werden soll.



Zuweisung auslösen. Während der Zuweisung erscheint der Cursor als Sanduhr.

Liftposition

Aktuelle Liftposition einer bestimmten Spezialposition zuweisen.

Aktuelle Position

Anzeige der aktuellen Liftposition in mm.

Arbeitsposition

Ist diese Option ausgewählt, wird die aktuelle Liftposition der Arbeitsposition des Turm, eines Spezialbechers oder einer externen Position des Schwenkarms zugewiesen.

Auswahl:

[Turm 1], Turm 2 (nicht für Probenwechsler 730),

Turm 1+2 (nur für Probenwechsler 730),

Spezialbecher 1...16,

Extern 1...4 (nicht für Probenwechsler 730)

Spülposition

Ist diese Option ausgewählt, wird die aktuelle Liftposition der Spülposition des Turms zugewiesen.

Auswahl:

[Turm 1], Turm 2 (nicht für Probenwechsler 730),

Turm 1+2 (nur für Probenwechsler 730)

Drehposition

Ist diese Option ausgewählt, wird die aktuelle Liftposition der Drehposition des Turms zugewiesen.

Auswahl:

[Turm 1], Turm 2 (nicht für Probenwechsler 730),

Turm 1+2 (nur für Probenwechsler 730)

Externe Positionen

Spezialposition

Ist diese Option ausgewählt, wird die aktuelle Liftposition der Spezialposition des Turms zugewiesen.

Auswahl:

[Turm 1], Turm 2 (nicht für Probenwechsler 730),

Turm 1+2 (nur für Probenwechsler 730)

Schwenkposition

Ist diese Option ausgewählt, wird die aktuelle Liftposition der Schwenkposition des Schwenkarms zugewiesen.

Auswahl:

[Externe Positionen]

Zuweisen

Zuweisung auslösen. Während der Zuweisung erscheint der Cursor als Sanduhr.

Schwenkarmposition zuweisen

Aktuelle Rackposition einer bestimmten externen Schwenkarmposition zuweisen.

Aktuelle Position

Anzeige der aktuellen Position des Schwenkarms in °.

Externe Position

[1] ... 4


Auswahl der externen Position, dem die aktuelle Schwenkarmposition zugewiesen werden soll.

Zuweisen

Zuweisung auslösen. Während der Zuweisung erscheint der Cursor als Sanduhr.

Pumpen

Hier können die am Turm angeschlossenen Pumpen ein- und ausgeschaltet werden.

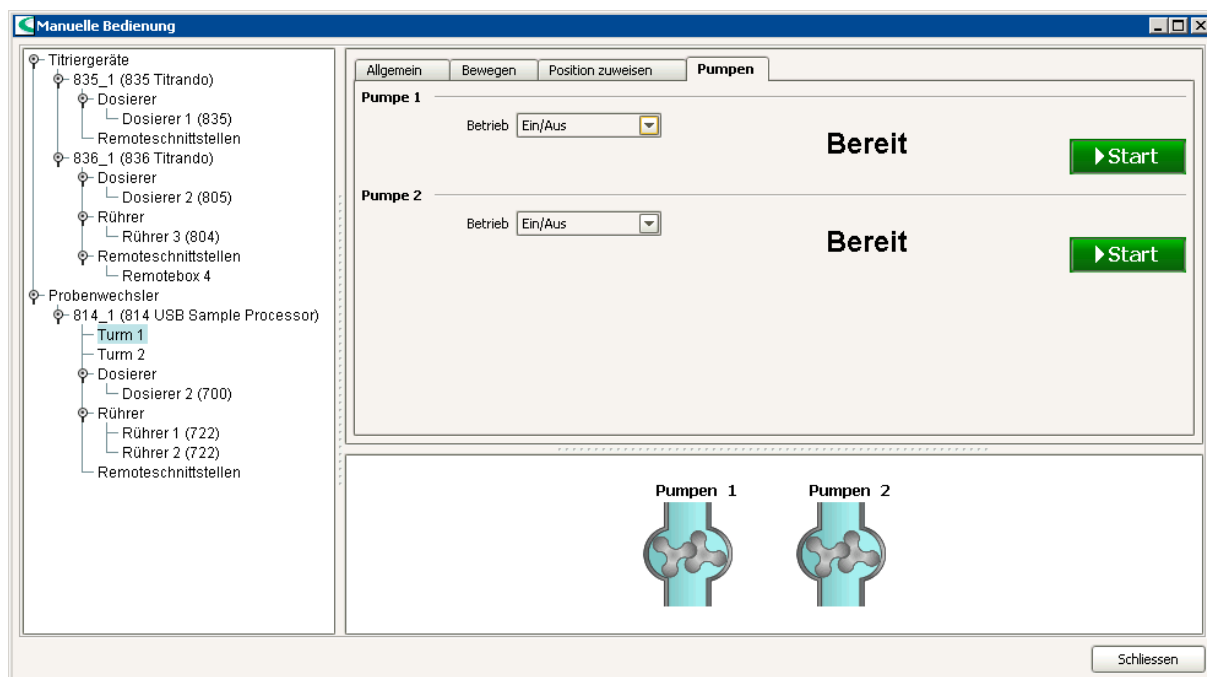

Pumpe 1

Pumpe 1 bzw. Ventil 1 am ausgewählten Turm manuell bedienen.

Betrieb

[Ein/Aus], Dauer

Wahl, ob die Pumpe bzw. das Ventil manuell ein-/ausgeschaltet werden sollen oder ob sie für eine definierte Dauer ein- und danach automatisch ausgeschaltet werden sollen.

Dauer

1 ... [60] ... 999999 s

Eingabe der Zeitdauer, während der Pumpe/Ventil eingeschaltet bleiben sollen. Dieses Feld erscheint nur für **Betrieb = Dauer**.



Pumpe 1 starten. In der Statusanzeige wird die laufende Zeit seit dem Start angezeigt.



Pumpe 1 stoppen.

Pumpe 2

Pumpe 2 bzw. Ventil 2 am ausgewählten Turm manuell bedienen.

Betrieb

[Ein/Aus], Dauer

Wahl, ob die Pumpe bzw. das Ventil manuell ein-/ausgeschaltet werden sollen oder ob sie für eine definierte Dauer ein- und danach automatisch ausgeschaltet werden sollen.

Dauer

1 ... [60] ... 999999 s

Eingabe der Zeitdauer, während der Pumpe/Ventil eingeschaltet bleiben sollen. Dieses Feld erscheint nur für **Betrieb = Dauer**.

▶ Start


Pumpe 2 starten. In der Statusanzeige wird die laufende Zeit seit dem Start angezeigt.

■ Stop

Pumpe 2 stoppen.

Heizung/Gas

Hier können Heizung, Gasfluss-Pumpe und Inertgasventil am Oven Sample Processor 774 ein- und ausgeschaltet werden.

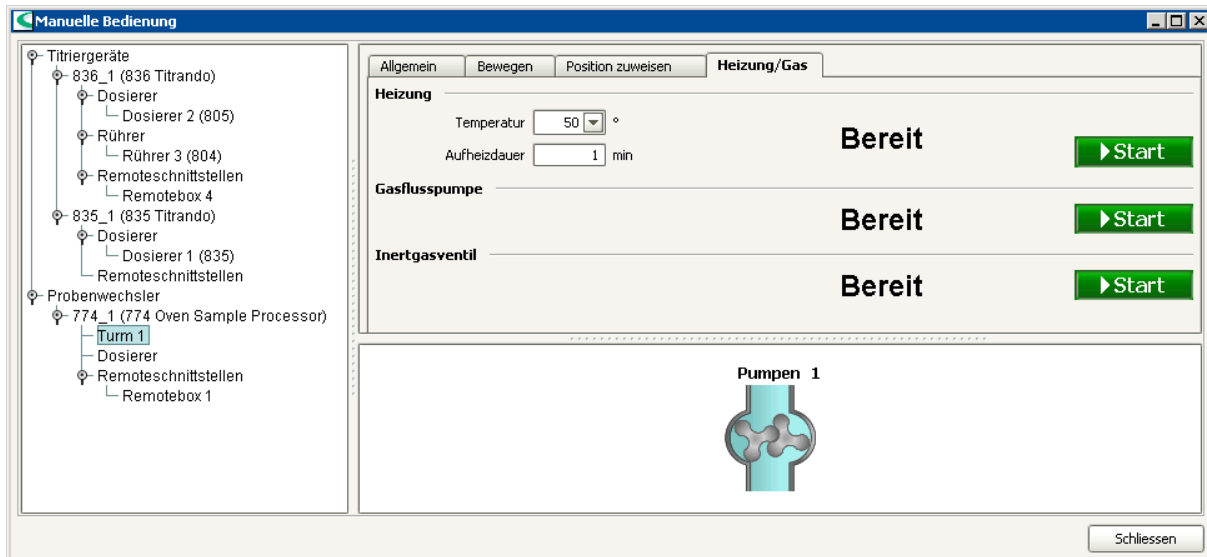

Heizung

Ofen innerhalb der definierten Aufheizdauer auf die gewünschte Temperatur heizen.

Temperatur

[50] ... 250 °C, Init

Temperatur, auf die geheizt werden soll. Mit **Init** wird auf die am Gerät eingestellte Initialtemperatur geheizt.

Aufheizdauer

[1] ... 999 min

Dauer der Aufheizphase bis zum Erreichen der gewünschten Temperatur.

▶ Start

Heizung starten. In der Statusanzeige wird die aktuelle Temperatur angezeigt.

■ Stop

Heizung stoppen.

Gasflusspumpe

Gasflusspumpe am Oven Sample Processor 774 ein-/ausschalten.



Gasflusspumpe einschalten. In der Statusanzeige wird die laufende Zeit seit dem Start angezeigt.



Gasflusspumpe ausschalten.

Inertgasventil

Inertgasventil am Oven Sample Processor 774 ein-/ausschalten.



Inertgasventil einschalten. In der Statusanzeige wird die laufende Zeit seit dem Start angezeigt.



Inertgasventil ausschalten.

Kapitel 3 **Arbeitsplatz**

3.1 **Allgemeines**

3.1.1 **Allgemeines**

Definition

Als **Arbeitsplatz** bezeichnet man in *tiamo* den Programmteil, in dem bis zu 4 Arbeitsplätze nebeneinander für den gleichzeitigen, unabhängigen Ablauf von Bestimmungen geöffnet werden können.

3.1.2 **Oberfläche**

Arbeitsplatzsymbol



Durch Klicken auf das Arbeitsplatzsymbol in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Arbeitsplatz** geöffnet, gleichzeitig wird das Arbeitsplatzsymbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des Symbols befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell geöffneten Arbeitsplätze angezeigt wird (siehe Arbeitsplatzauswahl).

Elemente

Die Oberfläche des Programmteils **Arbeitsplatz** umfasst die folgenden Elemente:

- Arbeitsplatzspezifische Menüleiste.
- Arbeitsplatzspezifische Symbolleiste.
- Hauptfenster, in dem bis zu 5 Unterfenster angezeigt werden können.

3.1.3 **Menüleiste**

Die Menüleiste im Programmteil **Arbeitsplatz** umfasst folgende Hauptmenüpunkte:

- **Datei**
Arbeitsplätze erstellen, bearbeiten, schliessen; Methode speichern; Manuelle Bedienung öffnen.
- **Ansicht**
Layout ändern, Ansicht laden, Ansicht speichern, Eigenschaften der Unterfenster bearbeiten.
- **Extras**
Manuelle Bedienung, Ablauftest, Probentabellen, Probenzuordnungstabelle, Textvorlagen.

- **Hilfe**
tiamo-Hilfe öffnen, Info zu *tiamo* anzeigen.

Menü Datei

Arbeitsplatz/Neu...

Neuen Arbeitsplatz öffnen.

Arbeitsplatz/Eigenschaften

Eigenschaften des ausgewählten Arbeitsplatzes bearbeiten.

Arbeitsplatz/Schliessen

Ausgewählten Arbeitsplatz schliessen.

Methode/Speichern

Methode mit geänderten Live-Parametern speichern.

Methode/Speichern unter...

Methode mit geänderten Live-Parametern unter einem neuen Namen speichern.



Abmelden...

Anwender abmelden.

Beenden

Programm beenden.

Menü Ansicht



Layout ändern

Layout der geladenen Arbeitsplatzansicht ändern.



Ansicht laden

Laden einer gespeicherten Arbeitsplatzansicht .



Ansicht speichern

Speichern der aktuellen Arbeitsplatzansicht .



Nebeneinander

Arbeitsplatzfenster horizontal teilen und zwei Arbeitsplätze nebeneinander anzeigen.



Untereinander

Arbeitsplatzfenster vertikal teilen und zwei Arbeitsplätze untereinander anzeigen.



Teilung aufheben

Teilung des Arbeitsplatzfensters wieder aufheben.



Eigenschaften/Ablauffenster

Eigenschaften für die Registerkarten **Einzelbestimmung** oder **Bestimmungsserie** im Unterfenster **Ablauf** einstellen.

Eigenschaften/Liveanzeige 1

Eigenschaften für Unterfenster **Liveanzeige 1** einstellen.

Eigenschaften/Liveanzeige 2

Eigenschaften für Unterfenster **Liveanzeige 2** einstellen.

Symbolleiste

Anzeige der Symbolleiste ein-/ausschalten.

Menü Extras



Manuelle Bedienung

Dialogfenster für die manuelle Bedienung von Geräten öffnen.



Ablauftest

Starttest für Bestimmung(en) durchführen.



Probentabelle/Neu...

Öffnen einer neuen, leeren Probentabelle.



Probentabelle/Öffnen...

Öffnen einer gespeicherten Probentabelle.



Probentabelle/Verwalten...

Verwalten von gespeicherten Probentabellen.

Probenzuordnungstabelle...

Definition von Probenidentifikationen, denen eine bestimmte Methode zugeordnet werden kann.

Textvorlagen...

Erstellen von Textvorlagen für die Probenidentifikationen **ID1...ID8** und für **Anmerkung**.

Menü Hilfe



tiamo Hilfe

tiamo-Hilfe öffnen.

Info

Informationen zum Programm und zur Installation anzeigen.

3.1.4 Symbolleiste

-  **Probentabelle/Neu...**
Öffnen einer neuen, leeren Probentabelle.
-  **Probentabelle/Öffnen...**
Öffnen einer gespeicherten Probentabelle.
-  **Probentabelle/Verwalten...**
Verwalten von gespeicherten Probentabellen.
-  **Layout ändern**
Layout der geladenen Arbeitsplatzansicht ändern.
-  **Ansicht laden**
Laden einer gespeicherten Arbeitsplatzansicht .
-  **Ansicht speichern**
Speichern der aktuellen Arbeitsplatzansicht .
-  **Ablauftest**
Starttest für Bestimmung(en) durchführen.
-  **Manuelle Bedienung**
Dialogfenster für die manuelle Bedienung von Geräten öffnen.
-  **Nebeneinander**
Arbeitsplatzfenster horizontal teilen und zwei Arbeitsplätze nebeneinander anzeigen.
-  **Untereinander**
Arbeitsplatzfenster vertikal teilen und zwei Arbeitsplätze untereinander anzeigen.
-  **Teilung aufheben**
Teilung des Arbeitsplatzfensters wieder aufheben.
-  **Abmelden**
Anwender abmelden.
-  **tiamo Hilfe**
tiamo-Hilfe öffnen.

3.1.5 Unterfenster

Auswahl

Im Hauptfenster können die folgenden 5 Unterfenster angezeigt werden:

- **Ablauf**
Fenster für die Steuerung von Abläufen und die Eingabe von Probedaten. Dieses Unterfenster wird immer angezeigt.
- **Methode**
Anzeige der aktuell geladenen Methode.
- **Liveanzeige 1**
Anzeige von Livekurven, Messwerten und Meldungen für die laufende Bestimmung.
- **Liveanzeige 2**
Anzeige von Livekurven, Messwerten und Meldungen für die laufende Bestimmung.
- **Report**
Anzeige von Reports der aufgenommenen Bestimmungen.

Darstellung

Die Unterfenster können durch Ziehen des Trennbalkens zwischen den Fenstern beliebig vergrößert oder verkleinert werden.

Durch einen Klick auf die Schaltfläche  oben rechts können die Unterfenster maximiert werden, so dass nur noch 1 Unterfenster im Hauptfenster angezeigt wird. Durch erneutes Klicken der Schaltfläche  im maximierten Unterfenster wird wieder zur ursprünglichen Ansicht aller Unterfenster gewechselt.

3.1.6 Funktionen

Im Programmteil **Arbeitsplatz** können folgende Funktionen ausgeführt werden:

Ansichten

- Layout der Arbeitsplatzansicht definieren
- Arbeitsplatzansicht laden
- Arbeitsplatzansicht speichern
- Arbeitsplatzansicht umbenennen
- Arbeitsplatzansicht löschen

Arbeitsplätze

- Arbeitsplatz erstellen
- Arbeitsplatz bearbeiten
- Arbeitsplatzauswahl
- Arbeitsplatz schließen

Probentabellen

- Probentabelle erstellen
- Probentabelle öffnen
- Probentabelle bearbeiten
- Probentabelle speichern
- Probentabelle drucken
- Eigenschaften definieren
- Probentabellen verwalten

Einzelbestimmung

- Einzelbestimmung starten/stoppen
- Einzelbestimmung anhalten/fortführen
- Probedaten eingeben
- Probedaten live ändern
- Eigenschaften definieren

Bestimmungsserie

- Serie starten/stoppen
- Bestimmung anhalten/fortführen
- Serie anhalten/fortführen
- Probentabelle laden
- Probentabelle bearbeiten
- Probedaten eingeben
- Probedaten live ändern
- Eigenschaften definieren

Unterfenster Methode

- Zoom
- Parameter live ändern
- Befehle abbrechen

Unterfenster Liveanzeige

- Eigenschaften definieren

Unterfenster Report

- Report auswählen

Extras

- Ablauftest durchführen
- Probenzuordnungstabelle bearbeiten
- Textvorlagen definieren

3.1.7 Arbeitsplatzansichten

Definition

Als **Arbeitsplatzansicht** wird der Inhalt und die Gestaltung des Hauptfensters im Programmteil **Arbeitsplatz** bezeichnet. Zur Arbeitsplatzansicht gehören folgende Elemente:

- Anzahl, Anordnung, Reihenfolge und Grösse der Unterfenster.
- Darstellung innerhalb der einzelnen Unterfenster, z.B. Anzeige der Probedatenspalten oder Eigenschaften der Kurvenanzeige.

Funktionen

Für Arbeitsplatzansichten sind folgende Funktionen möglich:

- **Layout ändern**
Anzahl, Anordnung und Reihenfolge der Unterfenster für die aktuelle Arbeitsplatzansicht definieren.
- **Ansicht speichern**
Aktuelle Arbeitsplatzansicht speichern.
- **Ansicht laden**
Gespeicherte Arbeitsplatzansicht laden.
- **Ansicht umbenennen**
Gespeicherte Arbeitsplatzansicht umbenennen.
- **Ansicht löschen**
Gespeicherte Arbeitsplatzansicht löschen.

Automatisch speichern

Ist bei den Optionen auf der Registerkarte **Speichern** der Punkt **Einstellungen für Arbeitsplatz** unter **Beim Beenden speichern** eingeschaltet, wird die aktuelle Arbeitsplatzansicht beim Schliessen von *tiamo* automatisch gespeichert.

Automatisch laden

Standardmässig wird die beim Schliessen von *tiamo* gespeicherte Arbeitsplatzansicht beim erneuten Öffnen von *tiamo* automatisch wieder geladen. Als Alternative kann für jede Anwendergruppe eine Standard-Arbeitsplatzansicht definiert werden, die beim ersten Öffnen des Programmteils **Arbeitsplatz** automatisch geladen wird.

Hinweis


Beim allerersten Programmstart wird standardmässig eine Arbeitsplatzansicht mit den 4 Unterfenstern **Ablauf**, **Methode**, **Liveanzeige 1** und **Report** geöffnet.

Export/Import

Arbeitsplatzansichten können auch exportiert und importiert werden. Damit können Ansichten zwischen verschiedenen Client/Server-Systemen ausgetauscht werden.

Layout ändern

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht, Layout ändern** wird das Dialogfenster **Layout ändern** geöffnet.

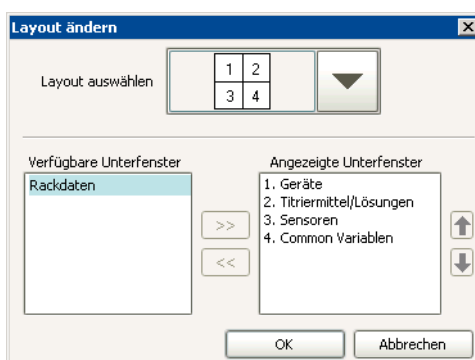

Layout auswählen

Auswahl der möglichen Kombinationen

Auswahl eines grafischen Symbols für die Anzahl und Anordnung der Unterfenster.

Verfügbare Unterfenster

Auswahl der Unterfenster

Anzeige der noch verfügbaren Unterfenster für die Anzeige in der Ansicht.

Angezeigte Unterfenster

Unterfenster

Anzeige der in der Ansicht angezeigten Unterfenster.



Hinzufügen des ausgewählten Unterfensters zur Ansicht.



Entfernen des ausgewählten Unterfensters aus der Ansicht.




Verschieben des ausgewählten Unterfensters nach oben (Reihenfolge ändern).



Verschieben des ausgewählten Unterfensters nach unten (Reihenfolge ändern).

Ansicht speichern

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht, Ansicht speichern** wird das Dialogfenster **Ansicht speichern** geöffnet.

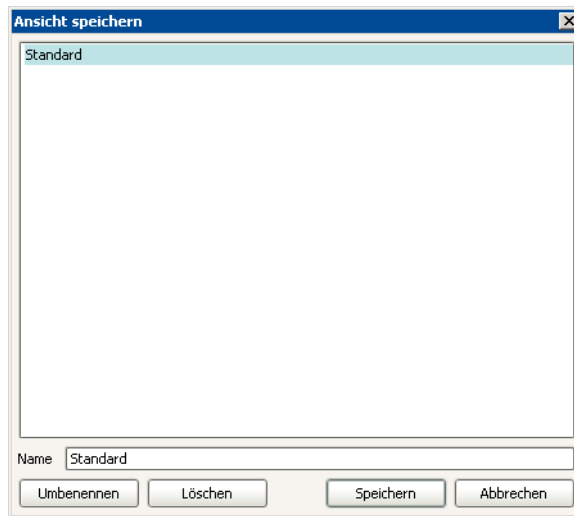

Name

Name, unter dem die Ansicht gespeichert werden soll.

Umbenennen

Ausgewählte Ansicht umbenennen.

Löschen


Ausgewählte Ansicht löschen.

Speichern

Ansicht unter dem angegebenen Namen speichern. Die gespeicherten Ansichten sind bei Client/Server-Systemen global gültig und verfügbar.

Ansicht laden

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht, Ansicht laden** wird das Dialogfenster **Ansicht laden** geöffnet.

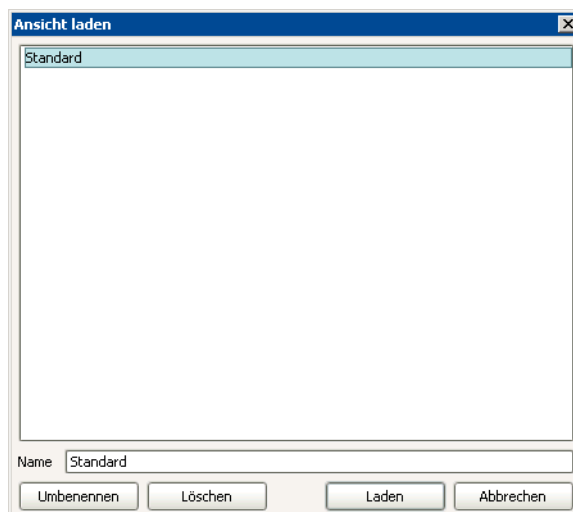

Name

Name der Ansicht, die geladen werden soll.

Umbenennen

Ausgewählte Ansicht umbenennen.

Löschen


Ausgewählte Ansicht löschen.

Laden

Ausgewählte Ansicht laden.

Ansicht umbenennen

Um eine Ansicht umzubenennen, muss entweder das Dialogfenster **Ansicht laden** oder **Ansicht speichern** geöffnet und die Schaltfläche **Umbenennen** gedrückt werden. Anschliessend öffnet sich das Fenster **Ansicht umbenennen**.

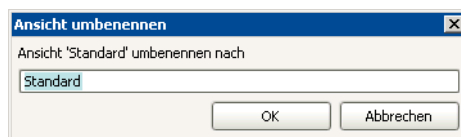

Ansicht umbenennen nach 50 Zeichen, ['Alter Name']

Eingabe eines neuen Namens für die Ansicht.


Ansicht löschen

Um eine Ansicht zu löschen, muss entweder das Dialogfenster **Ansicht laden** oder **Ansicht speichern** geöffnet und die Schaltfläche **Löschen** gedrückt werden. Anschliessend muss der Löschvorgang bestätigt werden.

3.2 Arbeitsplätze

3.2.1 Arbeitsplatz neu erstellen

Mit dem Menüpunkt **Datei, Arbeitsplatz, Neu...** wird das Fenster **Neuer Arbeitsplatz** geöffnet, in dem die Eigenschaften des neuen Arbeitsplatzes definiert werden können.

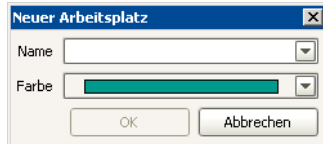

Name

50 Zeichen

Eingabe eines Namens für den neuen Arbeitsplatz oder Auswahl aus der Liste der 10 zuletzt verwendeten Namen.


Farbe

grün, blau, ocker, braun

Auswahl der Farbe für die Titellbalken der Unterfenster und das Statussymbol des neuen Arbeitsplatzes in der Statusleiste.

3.2.2 Arbeitsplatz Bearbeiten

Mit dem Menüpunkt **Datei, Arbeitsplatz, Eigenschaften...** wird das Fenster **Arbeitsplatzeigenschaften** geöffnet, in dem die Eigenschaften des ausgewählten Arbeitsplatzes definiert werden können.

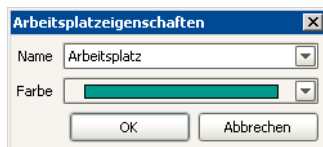

Name

50 Zeichen

Eingabe eines Namens für den ausgewählten Arbeitsplatz oder Auswahl aus der Liste der 10 zuletzt verwendeten Namen.

Farbe

grün, blau, ocker, braun

Auswahl der Farbe für die Titellbalken der Unterfenster und das Statussymbol des ausgewählten Arbeitsplatzes in der Statusleiste.

3.2.3 Arbeitsplatz anzeigen

Auswahl des Arbeitsplatzes im Arbeitsplatzsymbol

In der linken oberen Ecke des Arbeitsplatzsymbols wird die Anzahl geöffneter Arbeitsplätze angezeigt. Sind 2 oder mehr Arbeitsplätze geöffnet, können die beiden Arbeitsplätze, die im Hauptfenster nebeneinander oder untereinander angezeigt werden können, mit Hilfe des Arbeitsplatzsymbols ausgewählt werden.



Ein Arbeitsplatz ist geöffnet und wird im Hauptfenster angezeigt.



Zwei Arbeitsplätze sind geöffnet. Normalerweise wird nur ein Arbeitsplatz im Hauptfenster angezeigt, es können aber auch zwei Arbeitsplätze nebeneinander oder untereinander angezeigt werden.



Ein Klick mit der linken oder rechten Maustaste auf das Arbeitsplatzsymbol öffnet ein Menü, in dem die Namen aller geöffneten Arbeitsplätze angezeigt werden. Die im Hauptfenster angezeigten Arbeitsplätze werden dabei mit einem Häkchen markiert. Mit einem Klick auf den gewünschten Arbeitsplatz wird dieser anstelle des zuvor ausgewählten Arbeitsplatzes im Arbeitsplatzfenster angezeigt.

Einzelnen Arbeitsplatz anzeigen

Standardmässig wird immer der zuletzt geöffnete Arbeitsplatz einzeln im Hauptfenster angezeigt. Ist die Anzeige zweier Arbeitsplätze eingeschaltet, kann mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Ansicht, Teilung aufheben** wieder auf die Anzeige nur eines Arbeitsplatzes umgeschaltet werden.

Arbeitsplätze nebeneinander anzeigen

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Ansicht, Nebeneinander** werden zwei Arbeitsplätze nebeneinander im Hauptfenster angezeigt.

Arbeitsplätze untereinander anzeigen

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Ansicht, Untereinander** werden zwei Arbeitsplätze untereinander im Hauptfenster angezeigt.

3.2.4 Arbeitsplatz schliessen

Mit dem Menüpunkt **Datei, Schliessen** wird der fokussierte Arbeitsplatz geschlossen.

3.3 Probentabellen


3.3.1 Bearbeiten

Probentabelle neu erstellen

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Extras, Probentabelle, Neu...** wird das Dialogfenster **Probentabelle 'Neue Probentabelle'** mit einer leeren Probentabelle geöffnet, die anschliessend bearbeitet werden kann.

Probentabelle öffnen

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Extras, Probentabelle, Öffnen...** wird das Fenster **Probentabelle öffnen** geöffnet, in dem eine der global verfügbaren Probentabellen ausgewählt werden kann, die geöffnet werden soll.

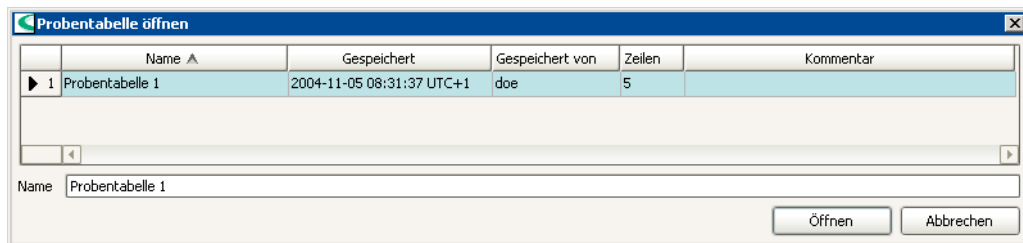

Liste der Probentabellen

Die Liste der Probentabellen enthält Informationen zu allen gespeicherten Probentabellen. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Gespeichert**, **Gespeichert von**, **Zeilen**, **Kommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Probentabelle.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Probentabelle.

Gespeichert von

Kurzname des Anwenders, welcher die Probentabelle gespeichert hat.

Zeilen

Anzahl Zeilen der Probentabelle.

Kommentar

Kommentar zur Probentabelle, der auf der Registerkarte **Kommentar** als Kommentar zur Probentabelle eingegeben wurde.

Probentabelle öffnen

Name

50 Zeichen

Name der Probentabelle, die geöffnet werden soll. Wird eine der Probentabellen in der Tabelle ausgewählt, wird der Name automatisch in diesem Feld eingetragen. Er kann aber auch manuell eingegeben werden.



Öffnet das Dialogfenster **Probentabelle 'Name'**, in dem die ausgewählte Probentabelle angezeigt wird und bearbeitet werden kann.

Probentabelle bearbeiten

Eine neu erstellte oder geöffnete Probentabelle kann im Dialogfenster **Probentabelle** bearbeitet und gespeichert werden.

	Methode	Probenposition	ID1	ID2	ID3	Einmass	Einheit
1	Chlorid	1				1.0	g
2	Chlorid	2				1.0	g
3	Chlorid	3				1.0	g
4	Chlorid	4				1.0	g
5	Chlorid	5				1.0	g
6	Chlorid	6				1.0	g
*							

Tabelle der Probedaten

Die Tabelle enthält die in der Probentabelle bereits gespeicherten Probedatenzeilen sowie eine Zeile für die Eingabe von neuen Daten, die anstelle der Zeilennummer einen Stern enthält. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar und nicht sortierbar.

Zur Bedeutung der Spalten siehe Probedaten bearbeiten.

Fenstermenüs

Das Menü **Bearbeiten** unterhalb der Probentabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Zeile bearbeiten

Fenster **Zeile bearbeiten** öffnen, in dem die Probedaten der fokussierten Zeile bearbeitet werden können.

Neue Zeile einfügen

Neue, leere Zeile oberhalb der fokussierten Zeile einfügen. Dabei wird automatisch das Fenster **Zeile bearbeiten** geöffnet, in dem die Probedaten der neuen Zeile bearbeitet werden können.

Zeilen ausschneiden

Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage übertragen.

Zeilen kopieren

Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage kopieren.

Zeilen einfügen

Zeilen aus der Zwischenablage oberhalb der fokussierten Zeile einfügen.

Zeilen löschen

Ausgewählte Zeilen löschen.

Inkrementieren

Mit dem Cursor, der die Form  annimmt, kann in der Tabelle der Bereich in einer Spalte ausgewählt werden, der automatisch inkrementiert werden soll. Dabei wird in den ausgewählten Zellen einer Spalte (**Probenposition**, **ID1...ID8**) ausgehend von der ersten ausgewählten Zelle die am Ende des Ausdruckes stehende Zahl automatisch um 1 erhöht. Dies funktioniert sowohl mit reinen Zahlen wie mit Textausdrücken, an deren Ende eine Zahl steht (z.B. **ABC10** → **ABC11** → **ABC12** ...).

Zeilen markieren

Ausgewählte Zeilen mit einer Markierung (roter Hintergrund für Zeilenzahl) kennzeichnen. Vor dem Start einer solchen Zeile werden die bei den **Eigenschaften** auf der Registerkarte **Abarbeiten** festgelegten entsprechenden Aktionen ausgelöst.

Zeilenmarkierung entfernen

Zeilenmarkierung für die ausgewählten Zeilen wieder entfernen.

Zeilen nicht ausführbar setzen

Ausgewählte Zeilen auf "nicht ausführbar" setzen, d.h. diese Zeilen werden im Ablauf nicht ausgeführt. Solche Zeilen werden mit einer roten Linie durchgestrichen.

Zeilen ausführbar setzen

Ausgewählte Zeilen auf "ausführbar" setzen, d.h. sie werden im Ablauf ausgeführt.

Probentabelle ▼

Das Menü **Probentabelle** unterhalb der Probentabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Speichern

Speichern der aktuellen Probentabelle unter demselben Namen.

Speichern unter...

Öffnen des Fensters **Probentabelle speichern** für das Speichern der aktuellen Probentabelle unter einem neuen Namen.

Drucken (PDF)

Öffnen des Fensters **Probentabelle drucken (PDF)**, in dem das Ausgabeformat definiert werden kann. Anschliessend wird die Probentabelle als PDF-Datei ausgegeben.

Eigenschaften

Fenster **Eigenschaften - Probentabelle** öffnen, in dem die Eigenschaften für die ausgewählte Probentabelle eingestellt werden können.

Daten importieren

Fenster Datei für Import auswählen für den Import von externen Daten öffnen.

Zeilen verschieben per Drag & Drop

Die in der Probentabelle ausgewählten Zeilen können per Drag&Drop in die Arbeitsprobentabelle verschoben werden.

Zeilen kopieren per Drag & Drop

Die in der Probentabelle ausgewählten Zeilen können bei gedrückter **Ctrl/Strg-Taste** per Drag&Drop in die Arbeitsprobentabelle kopiert werden.

Probedaten bearbeiten

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Zeile bearbeiten** öffnet sich das Dialogfenster **Zeile bearbeiten**.

Methode

50 Zeichen, Methodenauswahl

Eingabe oder Auswahl der Methode aus der aktuellen Methodengruppe, mit der die Bestimmung durchgeführt werden soll.



Öffnen des Fensters Methode öffnen für die erweiterte Methodenwahl, falls mehrere Methodengruppen vorhanden sind. Wird in diesem Fenster eine Methode aus einer anderen als der aktuellen Methodengruppe ausgewählt, ist diese Gruppe fortan die aktuelle Methodengruppe für die Schnellauswahl von Methoden im Feld **Methode**.

Probenposition

[1] ... 999

Position der Probe auf dem Rack. Diese Nummer dient zum Anfahren der Probenposition mit dem Befehl **MOVE**. Dazu muss dort **Zielposition = Probenposition** gesetzt werden.

ID1 ... ID8

50 Zeichen, Auswahl aus Textvorlagen

Probenidentifikationen ID1...ID8. In diesem Feld kann beliebiger Text eingegeben werden, die Überprüfung auf Typ und Grenzwerte erfolgt erst beim Start der Bestimmung. Für Probenidentifikationen vom Typ **Datum/Zeit** muss die Eingabe im Format **JJJJ-MM-TT hh:mm:ss** erfolgen. Sind Textvorlagen für die Probenidentifikation definiert, können diese ausgewählt werden.

Einmass

[1.0], **Zahl mit max. 10 Ziffern**


Probeneinmass (Einwaage). In diesem Feld können nur Zahlen, Dezimalpunkt, +, -, **E** und **e** eingegeben werden. Die Überprüfung auf Grenzwerte erfolgt erst beim Start der Bestimmung.

Einheit

16 Zeichen, [g], mg, µg, mL, µL, Stück

Einheit des Probeneinmasses (Einwaage). In diesem Feld kann beliebiger Text eingegeben werden.

Navigation

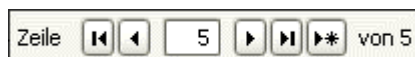

Anzeige der aktuell ausgewählten Zeile in der Probentabelle mit den folgenden Funktionen:



Sprung zur ersten Zeile in der Probentabelle.



Sprung zur vorhergehenden Zeile in der Probentabelle.



Möglichkeit zur Eingabe der gewünschten Zeilenzahl, zu der nach Betätigen von [Enter] direkt gesprungen wird.



Sprung zur nächsten Zeile in der Probentabelle. Ist das Ende der Tabelle erreicht, wird automatisch eine neue Zeile generiert und zu dieser gesprungen. Dabei wird die Zeilenzahl um **+1** erhöht.



Sprung zur letzten Zeile in der Probentabelle.



Sprung zu einer neuen, leeren Zeile. Dabei wird die Zeilenzahl um **+1** erhöht.

Funktionen

Übernehmen

Übernahme der eingetragenen Probedaten in die entsprechende Zeile der Probentabelle. Ist das Ende der Tabelle erreicht, wird automatisch eine neue Zeile generiert. Die gleiche Funktion kann auch durch Drücken der Taste [Enter] ausgelöst werden. Mit [Enter] wird aber zusätzlich auch automatisch zur nächsten Zeile weitergeschaltet.

Schliessen

Schliessen des Eingabefensters. Die aktuellen Probedaten werden dabei nicht in die Probentabelle übernommen (dies muss zuvor mit **[Übernehmen]** ausgelöst werden).

Probdaten importieren

Mit dem Menüpunkt **Probentabelle, Daten importieren...** im Fenster **Probentabelle** öffnet sich das Dialogfenster **Dateien für Import auswählen**, in dem die Datei ausgewählt werden muss, von der Probdaten importiert werden sollen.

Dateiname

Dateiname

Eingabe oder Auswahl der Datei, von der importiert werden soll.

Dateityp

[*.csv]

Auswahl des Importformats für den Import von Daten aus einer Datei (nur *.csv möglich).

Öffnen

Die Probdaten aus der ausgewählten Datei werden am Schluss der Probentabelle eingefügt.

Hinweis

Die Importdatei muss für jede Zeile unabhängig von der auf der Registerkarte **Anzeige** definierten Anzahl Datenfelder immer sämtliche Probdaten im Format **Methodenname;Probenposition;ID1;ID2;ID3;ID4;ID5;ID6;ID7;ID8;Einmass;Einheit** enthalten.

Probentabelle speichern

Mit dem Menüpunkt **Probentabelle, Speichern** im Fenster **Probentabelle** wird eine bestehende Probentabelle unter ihrem Namen neu gespeichert, ohne dass das Fenster **Probentabelle speichern** geöffnet wird.

Beim Speichern einer neu erstellten Probentabelle mit dem Menüpunkt **Probentabelle, Speichern** oder beim Speichern einer bestehenden Probentabelle mit dem Menüpunkt **Probentabelle, Speichern unter...** wird das Fenster **Probentabelle speichern** geöffnet, in dem dem ein Name für die Probentabelle eingegeben oder ausgewählt werden kann.

	Name ▲	Gespeichert	Gespeichert von	Zeilen	Kommentar
► 1	Probentabelle 1	2004-11-05 08:45:49 UTC+1	doe	6	

Name

Liste der Probentabellen

Die Liste der Probentabellen enthält Informationen zu allen gespeicherten Probentabellen.

Name

Name der Probentabelle.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Probentabelle.

Gespeichert von

Kurzname des Anwenders, welcher die Probentabelle gespeichert hat.

Zeilen

Anzahl Zeilen der Probentabelle.

Kommentar

Kommentar zur Probentabelle, der auf der Registerkarte **Kommentar** als Kommentar zur Probentabelle eingegeben wurde.

Probentabelle speichern

Name

50 Zeichen

Eingabe des Namens, unter dem die Probentabelle gespeichert werden soll.

Hinweis


Der Name der Probentabelle muss im ganzen Client/Serversystem eindeutig sein.

Speichern

Speichert die Probentabelle unter dem gewünschten Namen.

Probentabelle drucken (PDF)

Mit dem Menüpunkt **Probentabelle, Drucken (PDF)...** im Fenster **Probentabelle** wird das Fenster **Probentabelle drucken (PDF)** geöffnet, in dem das Ausgabeformat für die PDF-Ausgabe ausgewählt werden kann.

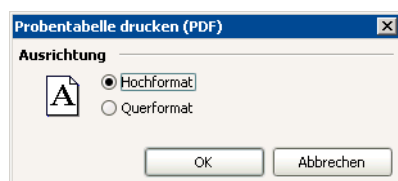

Ausrichtung

Hochformat

[ein], aus

Ausgabe im Hochformat.

Querformat

ein, [aus]

Ausgabe im Querformat.

3.3.2 Eigenschaften

Die Eigenschaften für eine Probentabelle werden auf den folgenden 5 Registerkarten eingestellt:

- **Anzeige**
Definition der Spalten, die in der Probentabelle angezeigt werden sollen.
- **Bearbeiten**
Optionen für das Bearbeiten der Probentabelle in den Dialogfenstern **Probentabelle** und **Zeile bearbeiten**.
- **Abarbeiten**
Optionen für das Abarbeiten der in die Arbeitsprobentabelle geladenen Probentabelle im Arbeitsplatzfenster auf der Registerkarte **Bestimmungsserie**.
- **Datenimport**
Ein-/Ausschalten des Imports von externen Daten für Felder der Probentabelle.
- **Kommentar**
Eingabe eines Kommentars zur Probentabelle.

Anzeige

Definition der Spalten, die in der Probentabelle angezeigt werden sollen.

Spalte	Ein-/Ausschalten	Überschrift
Probenposition	☒	Probenposition
ID1	☒	ID1
ID2	☒	ID2
ID3	☒	ID3
ID4	☐	ID4
ID5	☐	ID5
ID6	☐	ID6
ID7	☐	ID7
ID8	☐	ID8
Einmass	☒	Einmass
Einheit	☒	Einheit

Probenposition

[ein], aus
[**Probenposition**], 50 Zeichen

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Probenposition** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

ID1 ... ID3

[ein], aus
[**ID1...3**], 50 Zeichen

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalten **ID1...ID3** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

ID4 ... ID8

ein, [aus]
[**ID4...8**], 50 Zeichen

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalten **ID4...ID8** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Einmass

[ein], aus
[Einmass], 50 Zeichen

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Einmass** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Einheit

[ein], aus
[Einheit], 50 Zeichen


Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Einheit** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Hinweis

Für die Bestimmungsdaten werden immer die im **START-Befehl** unter **Methodenvariablen** definierten Namen verwendet.

Bearbeiten

Optionen für das Bearbeiten der Probentabelle in den Dialogfenstern **Probentabelle** und **Zeile bearbeiten**.

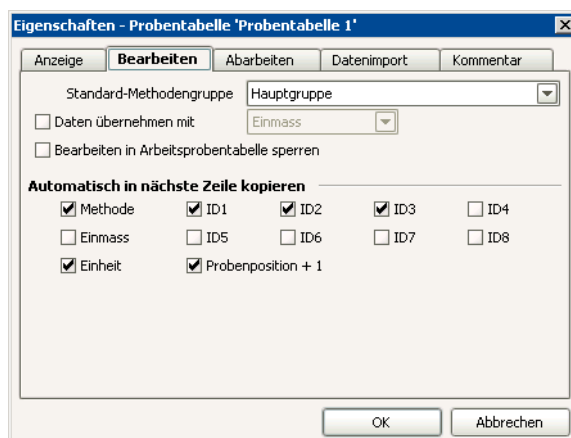

Standard-Methodengruppe

[Hauptgruppe], Methodengruppen

Auswahl der Standard-Methodengruppe für die Auswahl von Methoden in der Probentabelle.

Daten übernehmen mit

ein, [aus]
ID1 ... ID8, [Einmass], Einheit, Probenposition

Auswahl des Datenfeldes, das beim automatischen Datenimport via Waage, Barcodeleser oder Datei gefüllt sein muss, damit die Daten der Zeile in den Probedatenspeicher übernommen werden und zur nächsten Zeile weitergeschaltet wird. Ist die betreffende Spalte leer, werden weitere importierte Daten in die gleiche Zeile geschrieben. So ist es z.B. möglich, zuerst Probenidentifikationen via Barcodeleser in eine Zeile einzufüllen, und danach das Einmass für die gleiche Zeile von einer Waage zu übernehmen.

Hinweis

Diese Option hat bei der manuellen Dateneingabe keine Bedeutung.

Bearbeiten in Arbeitsprobentabelle sperren

ein, [aus]
[ID4...8], 50 Zeichen

Ist diese Option eingeschaltet, wird das Bearbeiten von Zeilen der in die Arbeitsprobentabelle geladenen Probentabellen gesperrt.

Automatisch in nächste Zeile kopieren

Methode

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probedatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

ID1 ... ID3

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probedatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

ID4 ... ID8

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probedatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

Einmass

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probedatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

Einheit

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probedatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.


Probenposition + 1

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probedatenzeile automatisch um **+1** inkrementiert.

Abarbeiten

Optionen für das Abarbeiten der in die Arbeitsprobentabelle geladenen Probentabelle im Arbeitsplatzfenster auf der Registerkarte Bestimmungsserie.

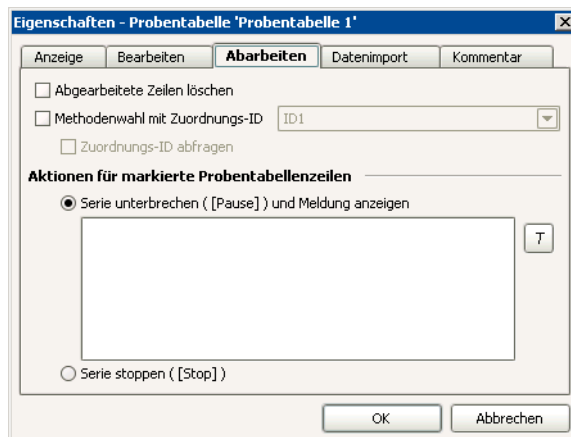

Abgearbeitete Zeilen löschen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden fertig abgearbeitete Zeilen in der Arbeitsprobentabelle automatisch gelöscht.

Methodenwahl mit Zuordnungs-ID

ein, [aus]

[ID1] ... ID8

Ist diese Option eingeschaltet, wird die ausgewählte Probenidentifikation für die Methodenwahl in der Arbeitsprobentabelle verwendet. Diese Identifikation erhält die nicht mehr änderbare Bezeichnung **Zuordnungs-ID**. Stimmt diese ID mit einer der Zuordnungs-ID's aus der Probenzuordnungstabelle überein, so wird die entsprechende Methode aus dieser Tabelle im Feld **Methode** eingetragen.

Zuordnungs-ID abfragen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird die **Zuordnungs-ID** unmittelbar nach dem Start der Bestimmung im Dialogfenster **Probenzuordnung** (siehe Arbeitsplatz - Extras - Probenzuordnungstabelle - Probenzuordnungsabfrage) abgefragt.

Aktion für markierte Probentabellenzeilen

Serie unterbrechen ([Pause]) und Meldung anzeigen

**[ein], aus
1000 Zeichen**

Ist diese Option ausgewählt, wird die Serie vor dem Start der markierten Zeile unterbrochen (entspricht **[Pause]**). Gleichzeitig erscheint eine Meldung, welche auch den im Meldungsfeld definierten Text enthält.

Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verändert werden kann. Innerhalb des Textfeldes kann auch der Formeleditor aufgerufen werden.


Serie stoppen ([Stop])

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, wird die Serie vor dem Start der markierten Zeile gestoppt (entspricht **[Stop]**).

Datenimport

Ein-/Ausschalten des Imports von externen Daten für Felder der Probentabelle.

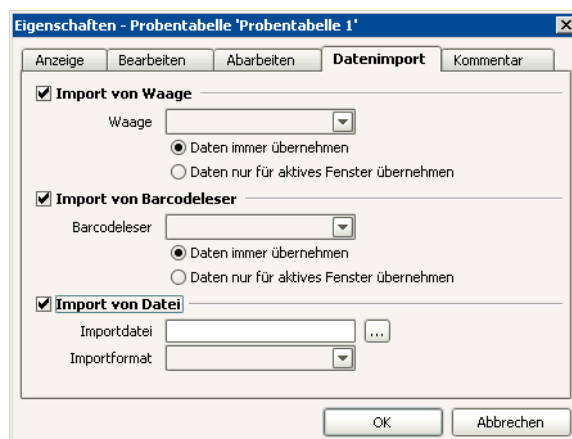

Import von Waage

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden externen Daten von der ausgewählten Waage in die geöffnete Probentabelle importiert. Daten können in die Felder **ID1...ID4**, **Einmass** und **Einheit** importiert werden.

Hinweis

Um Probenidentifikationen von der Waage importieren zu können, muss an der Waage der Datenexport entsprechend eingestellt werden (Bezeichnungen **ID1**, **ID2**, **ID3**, **ID4** verwenden).

Waage

Gerätename

Auswahl der Waage, von der Daten importiert werden sollen.

Daten immer übernehmen

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, werden die von der Waage geschickten Daten in die geöffnete Probentabelle importiert, bei der diese Waage als Datenquelle definiert ist.

Daten nur für aktives Fenster übernehmen

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, werden die von der Waage geschickten Daten nur in die geöffnete Probentabelle importiert, wenn diese aktiv ausgewählt ist (d.h. wenn das Fenster den Fokus besitzt).

Import von Barcodeleser

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden externen Daten vom ausgewählten Barcodelesegerät in die geöffnete Probentabelle importiert. Bei den Geräteeigenschaften des Barcodelesers wird definiert, in welches Feld die Daten importiert werden.

Barcodeleser

Gerätename

Auswahl des Barcodelesers, von dem Daten importiert werden sollen.

Daten immer übernehmen

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, werden die vom Barcodeleser geschickten Daten in die geöffnete Probentabelle importiert, bei der dieser Barcodeleser als Datenquelle definiert ist.

Daten nur für aktives Fenster übernehmen

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, werden die vom Barcodeleser geschickten Daten nur in die geöffnete Probentabelle importiert, wenn diese aktiv ausgewählt ist (d.h. wenn das Fenster den Fokus besitzt).

Import von Datei

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden externe Daten von einer Datei (z. B. via LIMS) in eine Probentabelle importiert. Dabei wird beim Öffnen der Probentabelle, beim Laden der Probentabelle in die Arbeitsprobentabelle sowie periodisch (alle 10 s), wenn die Probentabelle geöffnet ist (jedoch nicht, wenn das Dialogfenster **Zeile Bearbeiten** geöffnet ist), überprüft, ob die angegebene Importdatei vorhanden ist. Ist die Importdatei vorhanden, werden die Daten aus dieser Datei automatisch am Schluss der Probentabelle eingefügt. Nach jedem Import wird die Importdatei gelöscht.

Hinweis

Die Importdatei muss für jede Zeile unabhängig von der auf der Registerkarte **Anzeige** definierten Anzahl Datenfelder immer sämtliche Probedaten im Format **Methodenname;Probenposition;ID1;ID2;ID3;ID4;ID5;ID6;ID7;ID8;Einmass;Einheit** enthalten.

Importdatei

Dateiname

Eingabe oder Auswahl der Datei, von der importiert werden soll.


Importformat

[*.csv]

Auswahl des Importformats für den Import von Daten aus einer Datei (nur *.csv möglich).

Kommentar

Eingabe eines Kommentars zur Probentabelle.

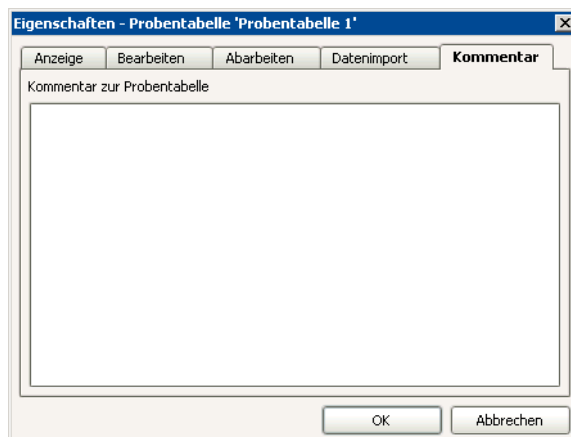


Kommentar zur Probentabelle 1000 Zeichen

Eingabe eines Kommentars zur Probentabelle. Dieser Kommentar wird auch in der gleichnamigen Spalte im Fenster **Probentabelle** angezeigt.

3.3.3 Verwalten

Probentabellen verwalten

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Extras, Probentabelle, Verwalten...** wird das Fenster **Probentabellen verwalten** geöffnet.

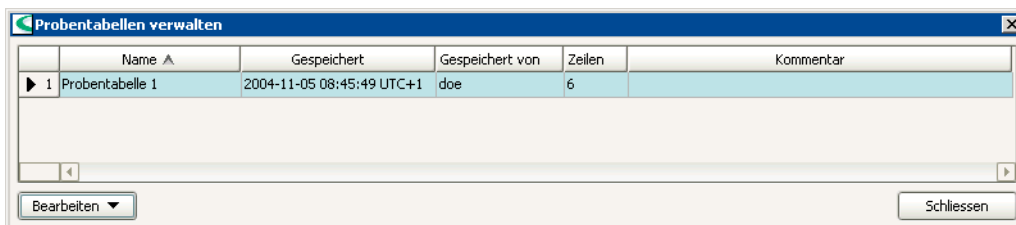

Liste der Probentabellen

Die Liste der Probentabellen enthält Informationen zu allen gespeicherten Probentabellen. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Gespeichert**, **Gespeichert von**, **Zeilen**, **Kommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Probentabelle.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Probentabelle.

Gespeichert von

Kurzname des Anwenders, welcher die Probentabelle gespeichert hat.

Zeilen

Anzahl Zeilen der Probentabelle.

Kommentar

Kommentar zur Probentabelle, der auf der Registerkarte **Kommentar** als Kommentar zur Probentabelle eingegeben wurde.

Fenstermenüs



Das Menü **Bearbeiten** unterhalb der Liste der Probentabellen enthält die folgenden Menüpunkte:

Umbenennen...

Ausgewählte Probentabelle umbenennen.

Kopieren

Ausgewählte Probentabelle(n) kopieren.

Löschen...

Ausgewählte Probentabelle(n) löschen.

Exportieren...


Ausgewählte Probentabelle(n) exportieren.

Importieren...

Probentabelle(n) importieren.

Probentabelle umbenennen

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Umbenennen...** im Fenster **Probentabellen verwalten** öffnet sich das Fenster **Probentabelle umbenennen** zum Umbenennen der ausgewählten Probentabelle.

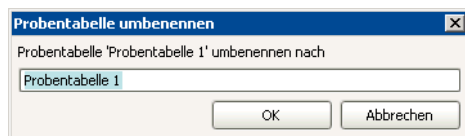

Probentabelle 'Name' umbenennen nach 50 Zeichen

Eingabe des neuen Namens für die Probentabelle.

Hinweis

Der Name der Probentabelle muss im ganzen Client/Serversystem eindeutig sein.

Probentabelle kopieren

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Kopieren** im Fenster **Probentabellen verwalten** werden die ausgewählten Probentabellen unter dem Namen **Kopie von 'Probentabellenname'** kopiert.

Probentabelle löschen

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Löschen...** im Fenster **Probentabellen verwalten** werden die ausgewählten Probentabellen gelöscht.

Probentabelle exportieren

Mit dem Menüpunkt Menüpunkt **Bearbeiten, Exportieren...** im Fenster **Probentabellen verwalten** werden die ausgewählten Probentabellen je in eine Datei mit dem Namen **'Name'.mstab** exportiert. Es öffnet sich das Dialogfenster **Verzeichnis für Export wählen**, in dem das Verzeichnis für den Export ausgewählt werden muss.

Probentabelle importieren

Mit dem Menüpunkt Menüpunkt **Bearbeiten, Importieren...** im Fenster **Probentabellen verwalten** öffnet sich das Dialogfenster **Dateien für Import auswählen**, in dem die zu importierenden Probentabellen ausgewählt werden müssen. Diese Probentabellen werden anschliessend importiert.

3.4 Extras

3.4.1 Ablauftest

Auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** wird mit  oder dem Menüpunkt **Extras, Ablauftest** für die unter **Methode** ausgewählte Methode der Starttest durchgeführt. Bedingung dafür ist, dass sich der Arbeitsplatz im Zustand **READY** befindet.

Methode

Anzeige der Methode für die Einzelbestimmung.

Statusanzeigen

Unterhalb der Zeilennummer erscheint eine der folgenden Statusanzeigen:

Ablauftest läuft...

Diese Anzeige erscheint während des Ablaufs des Tests. Zusätzlich erscheint ein Fortschrittsbalken, der Test kann dabei mit  neben dem Balken abgebrochen werden.

Fehler beim Ablauftest

Diese Anzeige erscheint, wenn beim Ablauftest ein Fehler aufgetreten ist. Anhand der angezeigten Zeilennummer kann der Anwender bei einer Bestimmungsserie feststellen, zu welcher Zeile die beim Fehler auftretende und im üblichen Meldungsfenster angezeigte Fehlermeldung gehört.

Ablauftest manuell abgebrochen

Diese Anzeige erscheint, wenn der Ablauftest vom Anwender manuell abgebrochen wurde.

Ablauftest fehlerfrei beendet

Diese Anzeige erscheint am Ende des fehlerfrei abgelaufenen Ablauftests.

3.4.2 Probenzuordnungstabelle

Allgemeines


Mit der **Probenzuordnungstabelle** kann sichergestellt werden, dass Proben anhand einer Probenidentifikation automatisch mit der **richtigen Methode** bearbeitet werden. In der Probenzuordnungstabelle wird definiert, welche Methode aufgrund einer bestimmten **Zuordnungs-ID** automatisch geladen werden soll. Damit dies funktioniert, muss für Einzelbestimmungen oder Bestimmungsserien in den **Eigenschaften** auf der Registerkarte **Abarbeiten** die Option **Methodenwahl mit Zuordnungs-ID** eingeschaltet und eine der Probenidentifikationen **ID1...ID8** als Zuordnungs-ID ausgewählt worden sein. Sobald beim Abarbeiten der Probedaten bei Einzelbestimmungen oder von Probedatenzeilen bei Bestimmungsserien eine **Zuordnungs-ID** erkannt wird, wird die entsprechende Methode automatisch im Feld **Methode** eingefüllt. Dieses Feld ist dann nicht mehr editierbar und wird grau dargestellt.

Hinweis

Die Probenzuordnungstabelle gilt für alle geöffneten Arbeitsplätze und wird pro Client gespeichert.

Probenzuordnungstabelle

Mit dem Menüpunkt **Extras, Probenzuordnungstabelle...** wird das Fenster **Probenzuordnungstabelle** geöffnet.

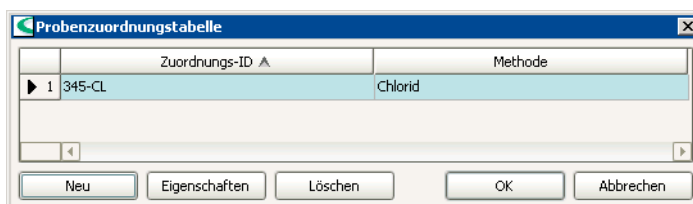


Die Übersichtstabelle zeigt alle definierten Zuordnungs-ID an und ist selber nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Zuordnungs-ID**, **Methode**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Zuordnungs-ID

Identifikation, anhand der die Methode zugeordnet wird.

Methode


Methode, die für die Zuordnungs-ID geladen wird.

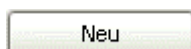

Öffnen des Dialogfensters **Probenzuordnung**, in dem eine neue Probenzuordnung eingegeben werden kann.




Öffnen des Dialogfensters **Probenzuordnung**, in dem die in der Tabelle ausgewählte Probenzuordnung bearbeitet werden kann.

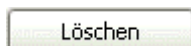

Löschen der in der Tabelle ausgewählten Probenzuordnung.

Probenzuordnung

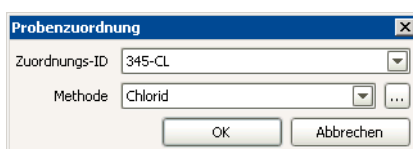

Zuordnungs-ID

50 Zeichen, Auswahl von Textvorlagen

Eingabe einer Identifikation, anhand der die Methode zugeordnet wird oder Auswahl einer definierten Textvorlage. Die Zuordnungs-ID kann beliebige alphanumerische Zeichen sowie Platzhalter (*) enthalten. Jede Zuordnungs-ID darf nur einmal vorkommen, jedoch können mehrere verschiedene Zuordnungs-ID's die gleiche Methode zuordnen.

Hinweis

Das Zeichen * selber muss mit ** generiert werden. Es bedeutet beliebig viele Zeichen. Bei der Eingabe der Muster darf kein gleiches Muster eingegeben werden. Passt eine Zeichenfolge auf mehrere Muster, so wird das erste in der Tabelle passende Muster verwendet.

Methode


Methodenauswahl

Auswahl der Methode in der aktuellen Methodengruppe. Bleibt man mit dem Cursor in diesem Feld, erscheint der Name der aktuellen Methodengruppe als Tooltip **Gruppe: 'Gruppenname'**, falls neben der Hauptgruppe noch andere Gruppen vorhanden sind.



Öffnen des Fensters Methode öffnen für die erweiterte Methodenwahl, falls mehrere Methodengruppen vorhanden sind. Wird in diesem Fenster eine Methode aus einer anderen als der aktuellen Methodengruppe ausgewählt, ist diese Gruppe fortan die aktuelle Methodengruppe für die Schnellauswahl von Methoden im Feld **Methode**.

Probenzuordnungsabfrage

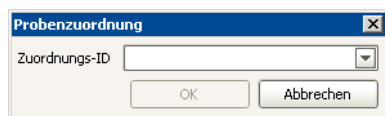


Zuordnungs-ID

50 Zeichen, Auswahl von Textvorlagen

Abfrage der Zuordnungs-ID, anhand der die Methode zugeordnet werden soll oder Auswahl einer definierten Textvorlage.

3.4.3 Textvorlagen

Für die Felder **Anmerkung** und **ID1...ID8** können Textvorlagen definiert werden, die bei der Eingabe dieser Felder auf der Registerkarte **Einzelbestimmung**, in der Proben-tabelle und in der Arbeitsproben-tabelle übernommen werden können. Die Textvorlagen werden pro Client gespeichert.

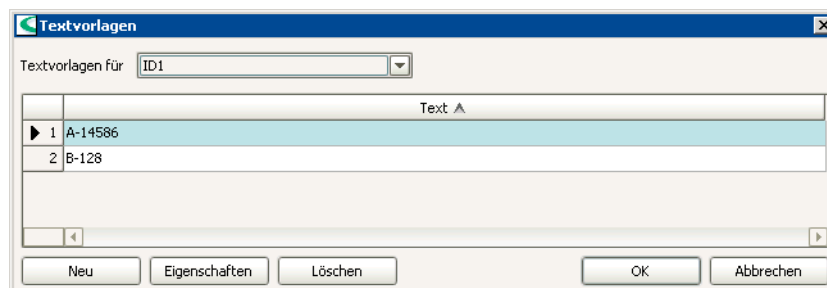

Textvorlagen für

[ID1], ID2, ID3, ID4, ID5, ID6, ID7, ID8, Anmerkung


Auswahl des Feldes, für das Textvorlagen definiert werden sollen.

Liste der Textvorlagen

In der Liste der Textvorlagen werden alle definierten Textvorlagen für das ausgewählte Feld angezeigt. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel **Text** kann die Tabelle in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Text


Anzeige der für das ausgewählte Feld definierten Textvorlagen.

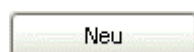

Hinzufügen einer neuen Textvorlage.




Bearbeiten der ausgewählten Textvorlage.

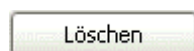

Löschen der ausgewählten Textvorlage.

Textvorlage bearbeiten

Im Dialogfenster **Textvorlage** können die Textvorlagen bearbeitet werden.

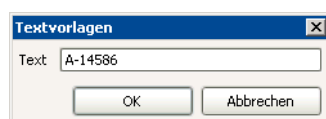

Text

100 Zeichen

Eingabe der Textvorlage.

3.5 Unterfenster Ablauf

3.5.1 Allgemeines

Unterfenster Ablauf

Das Unterfenster **Ablauf** enthält die Bedienungselemente für die Steuerung von Methodenabläufen und die Verwaltung von Probedaten. Es wird im Programmteil **Arbeitsplatz** immer angezeigt, d.h. es kann nicht aus der Arbeitsplatzansicht entfernt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrößert und verkleinert und auch maximiert werden.

Registerkarten

Das Unterfenster **Ablauf** besteht aus den beiden folgenden Registerkarten:

- **Einzelbestimmung**
Steuerung von Einzelbestimmungen.
- **Bestimmungsserie**
Steuerung von Bestimmungsserien.

Hinweis

Ist auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** ein Ablauf gestartet worden (**Status** <> **READY**), so ist die Registerkarte **Bestimmungsserie** nicht mehr zugänglich (inaktiv). Das gleiche gilt für die Registerkarte **Einzelbestimmung** im Falle eines gestarteten Ablaufs auf der Registerkarte **Bestimmungsserie**.

3.5.2 Einzelbestimmung

Übersicht

The screenshot shows the 'Ablauf' window with the 'Einzelbestimmung' tab selected. At the top, there are three buttons: 'Start' (green), 'Stop' (red), and 'Hold' (grey). To the right, the 'Status' is 'READY'. Below these are two sections: 'Bestimmungsparameter' and 'Probedaten'. 'Bestimmungsparameter' includes 'Anwender' (doe) and 'Anmerkung' (empty). 'Probedaten' includes 'Methode' (Chlorid), 'Probenposition' (1), 'ID1', 'ID2', 'ID3' (all empty), and 'Einmass' (1.0) with 'Einheit' (g).

Auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** im Unterfenster **Ablauf** können Parameter und Probedaten für Einzelbestimmungen bearbeitet und Ablauffunktionen ausgelöst werden. Sie umfasst die folgenden Elemente und Funktionen:

- **Bedienungselemente**
Schaltflächen zum Starten, Stoppen, Unterbrechen und Weiterführen von Bestimmungen.

- **Statusanzeige**
Anzeige des aktuellen Status des Arbeitsplatzes.
- **Bestimmungsparameter**
Eingabe von allgemeinen Parametern zur Bestimmung.
- **Probedaten**
Eingabe von Methode und Probenidentifikation für die nächste Bestimmung.
- **Eigenschaften**
Definieren der Eigenschaften für die Registerkarte **Einzelbestimmung**.

Bedienungselemente

Auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** befinden sich die folgenden Bedienungselemente:



Einzelbestimmung starten (Abkürzung: **Ctrl G**)

Die Schaltfläche ist vorhanden im Status **READY** (keine Bestimmung gestartet), **COND READY** (Konditionierbedingung erfüllt) und **COND BUSY** (Konditionieren läuft). Wenn der Start ausgelöst werden kann, ist sie grün, sonst hellgrau. Bei Methoden mit Konditionieren wird zuerst das Konditionieren gestartet.



Einzelbestimmung stoppen (Abkürzung: **Ctrl S**)

Die Schaltfläche ist vorhanden im Status **BUSY** (Bestimmung läuft), **COND READY** (Konditionierbedingung erfüllt) und **COND BUSY** (Konditionieren läuft) d.h. wenn das Konditionieren gestartet ist.



Ablauf unterbrechen

Die Schaltfläche ist aktiv (dunkelgrau) im Status **BUSY** (Bestimmung läuft), **COND READY** (Konditionierbedingung erfüllt) und **COND BUSY** (Konditionieren läuft). In allen anderen Fällen ist die Schaltfläche inaktiv (hellgrau). Nach dem Drücken von **[Hold]** wird anstelle dieser Schaltfläche **[Cont]** angezeigt.



Ablauf weiterführen

Die Schaltfläche ist nur vorhanden im Status **HOLD** (Bestimmung unterbrochen) und **COND HOLD** (Konditionieren unterbrochen). Nach dem Drücken von **[Cont]** wird anstelle dieser Schaltfläche wieder **[Hold]** angezeigt.

Statusanzeige

Auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** wird der aktuelle Status des Arbeitsplatzes angezeigt:

Status

READY

Bereit für den Start einer Bestimmung oder für das Konditionieren.

BUSY

Bestimmung läuft.

HOLD

Bestimmung unterbrochen.

COND BUSY

Konditionieren läuft.

COND READY

Konditionierbedingung erfüllt.

COND HOLD

Konditionieren unterbrochen.

ERROR

Fehler.

Bestimmungsparameter

Anwender

50 Zeichen

Ist die Option **Anwendername erforderlich** in den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, so wird in diesem Feld der Kurzname des aktuell angemeldeten Anwenders angezeigt. Das Feld ist dann nicht editierbar. Wird ohne Anmeldung gearbeitet, so kann in diesem Feld ein Anwendername eingegeben werden (nur im Status **READY**).

Probenummer

[0] ... 99999

Die Probenummer wird bei jedem Programmstart für alle Arbeitsplätze auf **0** gesetzt. Bei jedem Start einer Bestimmung wird sie um **+1** inkrementiert. Sie kann vom Anwender nur im Status **READY** editiert werden.

Anmerkung

100 Zeichen

Frei definierbare Anmerkung zur Bestimmung, die zusammen mit der Bestimmung gespeichert wird. Anstelle einer manuellen Eingabe können auch vorbereitete Textvorlagen ausgewählt werden.

Hinweis

Das Feld **Anmerkung** kann auch bei laufenden Bestimmungen live geändert werden. Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Anmerkung ändern** öffnet sich das Fenster **Live-Änderungen**.

Statistik

[ein], aus


Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn eine Methode geladen ist, in deren **START**-Befehl die Option **Statistik** eingeschaltet ist. Die in der Methode definierte Statistik kann hier manuell ein- und ausgeschaltet werden (nur im Status **READY**).

Das erste Feld nach **Statistik** zeigt die Anzahl bereits durchgeführter Bestimmungen für die Statistik an (Ist-Zähler). Dieses Feld ist nicht editierbar, es kann aber im Status **READY** mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Statistik löschen** auf **0** gesetzt werden, wobei gleichzeitig die bereits berechneten Statistikdaten gelöscht werden.

Das zweite Feld nach **Statistik** zeigt die Anzahl durchzuführender Bestimmungen für die Statistik an (Soll-Zähler). Es enthält standardmässig den im **START**-Befehl definierten Wert **Anzahl Einzelbestimmungen**. Dieses Feld ist nur im Status **READY** editierbar.

Anmerkung ändern

Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Anmerkung ändern** öffnet sich das Dialogfenster **Live-Änderungen**, in dem die Anmerkung während einer laufenden Bestimmung live geändert werden kann.

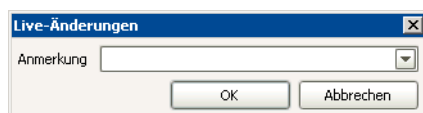

Anmerkung

100 Zeichen

Frei definierbare Anmerkung zur Bestimmung, die zusammen mit der Bestimmung gespeichert wird. Anstelle einer manuellen Eingabe können auch vorbereitete Textvorlagen ausgewählt werden.

Probedaten

Methode

50 Zeichen, Methodenauswahl

Eingabe oder Auswahl der Methode aus der aktuellen Methodengruppe, mit der die Bestimmung durchgeführt werden soll.

Hinweis

Wird eine Methode im Methodeneditor oder beim Nachbearbeiten geändert und gespeichert, so wird beim Start einer neuen Bestimmung die neueste Methodenversion geladen.



Öffnen des Fensters Methode öffnen für die erweiterte Methodenwahl, falls mehrere Methodengruppen vorhanden sind. Wird in diesem Fenster eine Methode aus einer anderen als der aktuellen Methodengruppe ausgewählt, ist diese Gruppe fortan die aktuelle Methodengruppe für die Schnellauswahl von Methoden im Feld **Methode**.

Probenposition

[1] ... 999

Position der Probe auf dem Rack. Diese Nummer dient zum Anfahren der Probenposition mit dem Befehl **MOVE**. Dazu muss dort **Zielposition** = **Probenposition** gesetzt werden.

ID1 ... ID8

50 Zeichen, Auswahl aus Textvorlagen

Probenidentifikationen ID1...ID8. In diesem Feld kann beliebiger Text eingegeben werden, die Überprüfung auf Typ und Grenzwerte erfolgt erst beim Start der Bestimmung. Für Probenidentifikationen vom Typ **Datum/Zeit** muss die Eingabe im Format **JJJJ-MM-TT hh:mm:ss** erfolgen. Sind Textvorlagen für die Probenidentifikation definiert, können diese ausgewählt werden.

Einmass

[1.0], Zahl mit max. 10 Ziffern

Probeneinmass (Einwaage). In diesem Feld können nur Zahlen, Dezimalpunkt, **+**, **-**, **E** und **e** eingegeben werden. Die Überprüfung auf Grenzwerte erfolgt erst beim Start der Bestimmung.

Einheit

16 Zeichen, [g], mg, µg, mL, µL, Stück

Einheit des Probeneinmasses (Einwaage). In diesem Feld kann beliebiger Text eingegeben werden.

Hinweise

Probenposition, ID1...ID8, Einmass und **Einheit** können für eine laufende Bestimmung live geändert werden. In diesen Feldern ist generell keine Formeleingabe möglich.

Für die Probedatenvariablen **ID1 ... ID8, Einmass, Einheit, Probenposition** wird automatisch der Name der im **START**-Befehl zugeordneten Methodenvariablen angezeigt.

Live-Änderungen

Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Live-Änderungen** öffnet sich das Dialogfenster **Live-Änderungen**, in dem die Probedaten während einer laufenden Bestimmung live geändert werden können.

Probenposition

[1] ... 999

Position der Probe auf dem Rack. Diese Nummer dient zum Anfahren der Probenposition mit dem Befehl **MOVE**. Dazu muss dort **Zielposition = Probenposition** gesetzt werden.

ID1 ... ID8

50 Zeichen, Auswahl aus Textvorlagen

Probenidentifikationen ID1...ID8. In diesem Feld kann beliebiger Text eingegeben werden, die Überprüfung auf Typ und Grenzwerte erfolgt erst beim Start der Bestimmung. Für Probenidentifikationen vom Typ **Datum/Zeit** muss die Eingabe im Format **JJJJ-MM-TT hh:mm:ss** erfolgen. Sind Textvorlagen für die Probenidentifikation definiert, können diese ausgewählt werden.

Einmass

[1.0], Zahl mit max. 10 Ziffern

Probeneinmass (Einwaage). In diesem Feld können nur Zahlen, Dezimalpunkt, **+**, **-**, **E** und **e** eingegeben werden. Die Überprüfung auf Grenzwerte erfolgt erst beim Start der Bestimmung.

Einheit

16 Zeichen, [g], mg, µg, mL, µL, Stück

Einheit des Probeneinmasses (Einwaage). In diesem Feld kann beliebiger Text eingegeben werden.

Hinweise

In den Feldern **Probenposition, ID1...ID8, Einmass** und **Einheit** ist generell keine Formeleingabe möglich.

Ist die Option **Kommentar bei Änderung von Probedaten** in den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, so erscheint vor der Speicherung das Fenster **Änderungskommentar Probedaten**.

Änderungskommentar für Probedaten

Ist die Option **Kommentar bei Änderung von Probedaten** in den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, so erscheint vor der Übernahme der geänderten Probedaten zuerst das Fenster **Änderungskommentar Probedaten**, in dem eine Begründung ausgewählt und ein Kommentar zur Änderung eingegeben werden muss.

Begründung

Auswahl aus Standardtexten

Auswahl aus dem im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** definierten Standardbegründungen für die Kategorie **Änderungen Probedaten**.

Kommentar

1000 Zeichen

Eingabe eines Kommentars zur Änderung an den Probedaten.

Bestimmungsablauf

Eine Bestimmung, die auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** im Unterfenster **Ab-
lauf** gestartet wird, läuft wie folgt ab:

1 - Laden der Probedaten

Die auf der Registerkarte **Einzelbestimmungen** eingetragenen Probedaten für die Bestimmung werden geladen.

2 - Methodenwahl

Bei der Methodenwahl werden folgende Aktionen ausgelöst:

- **Methodenwahl ohne Zuordnungs-ID**
Ist die Option **Methodenwahl mit Zuordnungs-ID** auf der Registerkarte **Abarbeiten** nicht eingeschaltet, bleibt die im Feld **Methode** ausgewählte Methode geladen.
- **Methodenwahl mit Zuordnungs-ID**
Ist die Option **Methodenwahl mit Zuordnungs-ID** auf der Registerkarte **Abarbeiten** eingeschaltet, wird anhand der **Probenzuordnungs-ID** die in der **Probenzuordnungstabelle** definierte Methode geladen.

3 - Starttest

Beim Starttest werden folgende Überprüfungen und Aktionen ausgelöst:

- **Berechtigung zum Ausführen der Methode?**
Überprüfung, ob der angemeldete Anwender die Berechtigung für das Ausführen der verlangten Methode besitzt.
- **Methode ablauffähig?**
Überprüfung, ob die verlangte Methode ablauffähig ist. Bei nicht ablauffähigen Methoden erscheint die Aufforderung, den Methodentest durchzuführen und die Methode entsprechend zu ändern.
- **Geräte(module) und Rack prüfen**
Prüfung, ob die in den gerätespezifischen Befehlen verlangten Geräte (bzw. Gerätetypen), Gerätemodule (z.B. Messeingang, Turm, etc.) und

Racks vorhanden und verfügbar bzw. zugeordnet sind. Falls das Gerät in einem Befehl noch nicht zugeordnet ist, erscheint das Fenster **Gerätezuordnung** (siehe unten) für die Zuordnung des Gerätes.

- **Lösungen prüfen**
Prüfung, ob die in den gerätespezifischen Befehlen verlangten Lösungen vorhanden und verfügbar sind.
- **Sensoren prüfen**
Prüfung, ob die in den gerätespezifischen Befehlen verlangten Sensoren vorhanden und verfügbar sind.

Hinweis

Der Starttest kann im Status **READY** auch manuell mit dem Menüpunkt **Extras, Ablauftest** ausgelöst werden.

4 - Vorkonditionieren (nur bei Methoden mit Konditionieren)

Bei Methoden, die Befehle mit eingeschaltetem Konditionieren enthalten, wird für alle diese Befehle das Vorkonditionieren gestartet, wenn die Option **Automatisches Konditionieren** im **START**-Befehl eingeschaltet ist. Das Vorkonditionieren gehört noch nicht zur Bestimmung und inkrementiert keine Zähler (**Probenummer**, **Statistik**).

- **Konditionierbedingung nicht erfüllt**
Nach dem Start des Vorkonditionierens wechselt der Status auf **COND BUSY**. In diesem Zustand kann die Bestimmung mit **[Start]** gestartet werden, obwohl die Konditionierbedingung nicht erfüllt ist. Das Konditionieren kann auch mit **[Stop]** abgebrochen oder mit **[Hold]** unterbrochen und mit **[Cont]** fortgesetzt werden. Tritt beim Konditionieren ein Fehler auf, wird weder die Fehlerspur noch die Exitspur durchlaufen.
- **Konditionierbedingung erfüllt**
Ist die Konditionierbedingung erfüllt, wechselt der Status auf **COND READY**. In diesem Zustand kann die Bestimmung mit **[Start]** gestartet werden. Das Konditionieren kann aber auch mit **[Stop]** abgebrochen oder mit **[Hold]** unterbrochen und mit **[Cont]** fortgesetzt werden. Solange die Bestimmung noch nicht gestartet wurde, wird die Konditionierbedingung laufend weiter überwacht.

5 - Methodenstart

Beim Methodenstart werden folgende Überprüfungen und Aktionen ausgelöst:

- **Probedaten prüfen**
Prüfung, ob die eingegebenen Probedaten den definierten Methodenvariablen entsprechen und gültig sind.
- **Bestimmungs-ID vergeben**
Für die Bestimmung wird eine eindeutige Bestimmungs-ID vergeben.
- **Geräte(module) reservieren**
Die von den geräteabhängigen Befehlen der Methode verwendeten Geräte bzw. deren Funktionseinheiten werden für die Dauer der Bestimmung reserviert, d.h. sie können weder in anderen Arbeitsplätzen verwendet noch manuell bedient werden.
- **Probenummer erhöhen**
Die **Probenummer** wird um **+1** erhöht.
- **Statistikzähler erhöhen**
Ist die Statistik sowohl im **START**-Befehl wie auch auf der Registerkarte **Einzelbestimmungen** eingeschaltet, wird der Statistikzähler um **+1** erhöht. Falls eine neue Methode geladen wurde oder der Statistikzähler

dem Sollzähler entspricht, werden zuvor die aktuellen Statistikdaten gelöscht und der Statistikzähler auf **0** gesetzt.

6 - Hauptablauf

Beim Abarbeiten dergeladenen Methode können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- **Hauptspur abarbeiten**
Nach dem Start der Hauptspur wechselt der Status auf **BUSY**. Die Befehle der Hauptspur und der von ihr aufgerufenen anderen Spuren werden der Reihe nach abgearbeitet. Werden von der Hauptspur Spuren aufgerufen, die nicht frei sind, wird gewartet, bis diese Spuren gestartet werden können.
- **Ablauf unterbrechen und fortführen**
Eine laufende Bestimmung kann jederzeit mit **[Hold]** unterbrochen und mit **[Cont]** fortgesetzt werden. Dabei werden alle aktiven Spuren gemeinsam angehalten und fortgesetzt.
- **Ablauf abbrechen**
Eine laufende Bestimmung kann jederzeit mit **[Stop]** abgebrochen werden. Anschliessend wird eine allfällige Exitspur durchlaufen und die Bestimmung beendet.
- **Abbruch durch Fehler**
Tritt bei einer laufenden Bestimmung ein Fehler auf, der zum Abbruch der Bestimmung führt, wird eine allfällige Fehlerspur durchlaufen und die Bestimmung beendet.
- **Exitspur abarbeiten**
Sind die Hauptspur und sämtliche von ihr aufgerufenen Spuren beendet, wird eine allfällige Exitspur durchlaufen und die Bestimmung beendet. Nach dem Ende der Hauptspur wechselt der Status auf **READY**.


7 - Nachkonditionieren (nur bei Methoden mit Konditionieren)

Bei Methoden, die Befehle mit eingeschaltetem Konditionieren enthalten und bei denen die Option **Automatisches Konditionieren** im **START**-Befehl eingeschaltet ist, wird für alle diese Befehle automatisch das Nachkonditionieren mit der geladenen Methode gestartet, und zwar unmittelbar nach dem Ende der Spur, die den Konditionierbefehl enthält.

- **Konditionierbedingung nicht erfüllt**
Nach dem Start des Nachkonditionierens wechselt der Status auf **COND BUSY**. In diesem Zustand kann eine neue Bestimmung mit **[Start]** gestartet werden, obwohl die Konditionierbedingung nicht erfüllt ist. Das Konditionieren kann auch mit **[Stop]** abgebrochen oder mit **[Hold]** unterbrochen und mit **[Cont]** fortgesetzt werden. Tritt beim Konditionieren ein Fehler auf, wird weder die Fehlerspur noch die Exitspur durchlaufen.
- **Konditionierbedingung erfüllt**
Ist die Konditionierbedingung erfüllt, wechselt der Status auf **COND READY**. In diesem Zustand kann eine neue Bestimmung mit **[Start]** gestartet werden. Das Konditionieren kann auch mit **[Stop]** abgebrochen oder mit **[Hold]** unterbrochen und mit **[Cont]** fortgesetzt werden. Solange die Bestimmung noch nicht gestartet wurde, wird die Konditionierbedingung laufend weiter überwacht.

Gerätezuordnung

Wird beim Starttest festgestellt, dass für einen geräteabhängigen Befehl noch kein Gerät zugeordnet ist, erscheint das Fenster **Gerätezuordnung**:

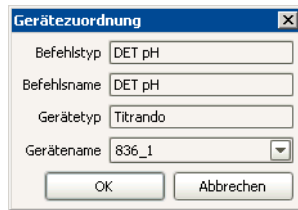

Gerätezuordnung

Befehlstyp: DET pH

Befehlsname: DET pH

Gerätetyp: Titrando

Gerätename: 836_1

OK Abbrechen

Befehlstyp

Anzeige des Befehlstyps.

Befehlsname

Anzeige des Befehlsnamens.

Gerätetyp

Anzeige des im Befehl ausgewählten Gerätetyps.

Gerätename

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.


Eigenschaften

Die Eigenschaften für die Registerkarte **Einzelbestimmung** werden auf den folgenden 3 Registerkarten eingestellt:

- **Anzeige**
Definition der Spalten, die auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** angezeigt werden sollen.
- **Abarbeiten**
Optionen für das Abarbeiten von Einzelbestimmungen.
- **Datenimport**
Ein-/Ausschalten des Imports von externen Daten für Felder auf der Registerkarte **Einzelbestimmung**.

Anzeige

Definition der Bedienungselemente und Spalten, die auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** angezeigt werden sollen.

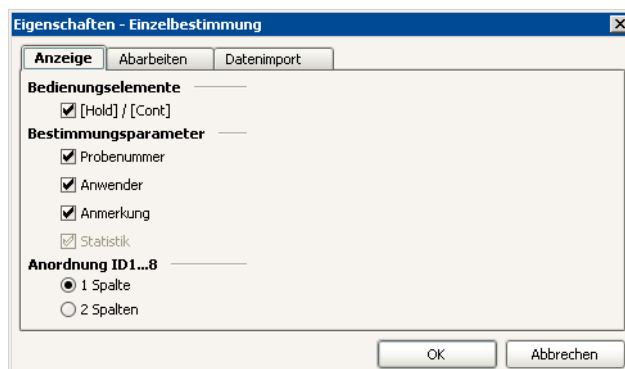

Eigenschaften - Einzelbestimmung

Anzeige Abarbeiten Datenimport

Bedienungselemente

☒ [Hold] / [Cont]

Bestimmungsparameter

☒ Probennummer

☒ Anwender

☒ Anmerkung

☒ Statistik

Anordnung ID1...8

☒ 1 Spalte

☐ 2 Spalten

OK Abbrechen

Bedienungselemente

[Hold] / [Cont]

[ein], aus

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Bedienungstasten **[Hold]** bzw. **[Cont]**.

Bestimmungsparameter

Probenummer

[ein], aus

Ein-/Ausschalten der Anzeige des Feldes **Probenummer**.

Anwender

[ein], aus

Ein-/Ausschalten der Anzeige des Feldes **Anwender**.

Anmerkung

[ein], aus

Ein-/Ausschalten der Anzeige des Feldes **Anmerkung**.

Statistik

[ein], aus

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Statistikfelder.

Anordnung ID1...8

1 Spalte

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, werden die Probenidentifikationen **ID1...ID8** einspaltig angezeigt.

2 Spalten

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, werden die Probenidentifikationen **ID1...ID8** zweispaltig angezeigt.

Hinweis

Die Felder **Einmass** und **Einheit** werden immer nebeneinander in einer Zeile dargestellt.

Abarbeiten

Optionen für das Abarbeiten von Einzelbestimmungen.



Methodenwahl mit Zuordnungs-ID

ein, [aus]

[ID1] ... ID8

Ist diese Option eingeschaltet, wird die ausgewählte Probenidentifikation für die Methodenwahl verwendet. Diese Identifikation erhält die nicht mehr änderbare Bezeichnung **Zuordnungs-ID**. Stimmt diese ID mit einer der Zuordnungs-ID's aus der Probenzuordnungstabelle überein, so wird die entsprechende Methode aus dieser Tabelle im Feld **Methode** eingetragen.

Zuordnungs-ID abfragen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird die **Zuordnungs-ID** unmittelbar nach dem Start der Bestimmung im Dialogfenster **Probenzuordnung** (siehe *Arbeitsplatz - Extras - Probenzuordnungstabelle - Probenzuordnungsabfrage*) abgefragt.


Bestimmung automatisch wiederholen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird nach dem Abschluss einer Bestimmung automatisch die nächste Bestimmung mit derselben Methode gestartet. Um die automatische Wiederholung abubrechen, muss die Bestimmung mit **[Stop]** abgebrochen werden.

Datenimport

Ein-/Ausschalten des Imports von externen Daten für Felder auf der Registerkarte **Einzelbestimmung**.

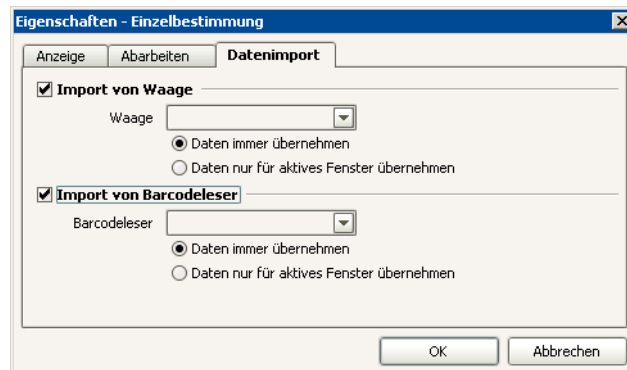

Import von Waage

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden externen Daten von der ausgewählten Waage in die Felder auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** importiert. Daten können in die Felder **ID1...ID4**, **Einmass** und **Einheit** importiert werden.

Hinweis

Um Probenidentifikationen von der Waage importieren zu können, muss an der Waage der Datenexport entsprechend eingestellt werden (Bezeichnungen **ID1**, **ID2**, **ID3**, **ID4** verwenden).

Waage

Gerätename

Auswahl der Waage, von der Daten importiert werden sollen.

Daten immer übernehmen

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, werden die von der Waage geschickten Daten in alle Registerkarten **Einzelbestimmung** der geöffneten Arbeitsplätze importiert, bei denen diese Waage als Datenquelle definiert ist.

Daten nur für aktives Fenster übernehmen

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, werden die von der Waage geschickten Daten nur in die Registerkarte **Einzelbestimmung** desjenigen Arbeitsplatzes importiert, welcher aktiv ausgewählt ist.

Import von Barcodeleser

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden externen Daten vom ausgewählten Barcodelesegerät in die Felder auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** importiert. Bei den Geräteeigenschaften des Barcodelesers wird definiert, in welches Feld die Daten importiert werden.

Barcodeleser

Gerätename

Auswahl des Barcodelesers, von dem Daten importiert werden sollen.

Daten immer übernehmen

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, werden die vom Barcodeleser geschickten Daten in alle Registerkarten **Einzelbestimmung** der geöffneten Arbeitsplätze importiert, bei denen dieser Barcodeleser als Datenquelle definiert ist.

Daten nur für aktives Fenster übernehmen

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, werden die vom Barcodeleser geschickten Daten nur in die Registerkarte **Einzelbestimmung** desjenigen Arbeitsplatzes importiert, welcher aktiv ausgewählt ist.

3.5.3 Bestimmungsserie

Übersicht

	Methode	Probenposition	ID1	ID2	ID3	Einmass	Einheit
1	Chlorid	1				1.0	g
2	Chlorid	2				1.0	g
3	Chlorid	3				1.0	g

Auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** im Unterfenster **Ablauf** können Parameter und Probedaten für Bestimmungsserien bearbeitet und Ablauffunktionen ausgelöst werden. Sie umfasst die folgenden Elemente und Funktionen:

- **Bedienungselemente**
Schaltflächen zum Starten, Stoppen, Unterbrechen und Weiterführen von Bestimmungen und Serien.
- **Statusanzeige**
Anzeige des aktuellen Status des Arbeitsplatzes.
- **Bestimmungsparameter**
Eingabe von allgemeinen Parametern zu den Bestimmungen.
- **Probedaten**
Eingabe von Probedaten für die nächsten Bestimmungen.
- **Eigenschaften**
Definieren der Eigenschaften für die Registerkarte **Bestimmungsserie**.

Bedienungselemente

Auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** befinden sich die folgenden Bedienungselemente:

► Start

Serie starten (Abkürzung: **Ctrl G**)

Start der ersten Bestimmung einer Probenserie. Die Schaltfläche ist vorhanden im Status **READY** (keine Bestimmung gestartet). Wenn der Start ausgelöst werden kann, ist sie grün, sonst hellgrau. Bei Methoden mit Konditionieren wird zuerst das Konditionieren gestartet, anschliessend (Status **COND READY**) automatisch die Bestimmung.

■ Stop

Serie stoppen (Abkürzung: **Ctrl S**)

Sofortiger Stopp der laufenden Bestimmung (oder des Konditionierens) einer Probenserie. Diese Schaltfläche ist vorhanden im Status **BUSY** (Bestimmung läuft), **COND READY** (Konditionierbedingung erfüllt) und **COND BUSY** (Konditionieren läuft) d.h. wenn das Konditionieren gestartet ist.

|| Hold

Ablauf unterbrechen

Ablauf der laufenden Bestimmung einer Probenserie unterbrechen. Die Schaltfläche ist aktiv (dunkelgrau) im Status **BUSY** (Bestimmung läuft), **COND READY** (Konditionierbedingung erfüllt) und **COND BUSY** (Konditionieren läuft). In allen anderen Fällen ist die Schaltfläche inaktiv (hellgrau). Nach dem Drücken von **[Hold]** wird anstelle dieser Schaltfläche **[Cont]** angezeigt.

► Cont

Ablauf weiterführen

Ablauf der laufenden Bestimmung einer Probenserie weiterführen. Die Schaltfläche ist nur vorhanden im Status **HOLD** (Bestimmung unterbrochen) und **COND HOLD** (Konditionieren unterbrochen). Nach dem Drücken von **[Cont]** wird anstelle dieser Schaltfläche wieder **[Hold]** angezeigt.

|| Pause

Serie unterbrechen

Mit dieser Schaltfläche wird die laufende Bestimmung einer Probenserie noch zu Ende geführt, aber keine neue Bestimmung mehr gestartet. Die Schaltfläche ist vorhanden im Status **BUSY** (Bestimmung läuft). In allen anderen Fällen ist die Schaltfläche inaktiv (hellgrau). Nach dem Drücken von **[Pause]** wird anstelle dieser Schaltfläche **[Cont]** angezeigt.

► Cont

Serie weiterführen

Nächste Bestimmung der unterbrochenen Probenserie starten. Die Schaltfläche ist nur vorhanden im Status **HOLD** (Serie unterbrochen). Nach dem Drücken von **[Cont]** wird anstelle dieser Schaltfläche wieder **[Pause]** angezeigt.

Statusanzeige

Auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** wird der aktuelle Status des Arbeitsplatzes angezeigt:

Status

READY

Bereit für den Start einer Bestimmung oder für das Konditionieren.

BUSY

Bestimmung läuft.

HOLD

Bestimmung unterbrochen.

PAUSE

Serie unterbrochen.

COND BUSY

Konditionieren läuft.

COND READY

Konditionierbedingung erfüllt.

COND HOLD

Konditionieren unterbrochen.

ERROR

Fehler.

Bestimmungsparameter

Anwender

50 Zeichen

Ist die Option **Anwendername erforderlich** in den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, so wird in diesem Feld der Kurzname des aktuell angemeldeten Anwenders angezeigt. Das Feld ist dann nicht editierbar. Wird ohne Anmeldung gearbeitet, so kann in diesem Feld ein Anwendername eingegeben werden (nur im Status **READY**).

Probennummer

[0] ... 99999

Die Probennummer wird bei jedem Programmstart für alle Arbeitsplätze auf **0** gesetzt. Bei jedem Start einer Bestimmung wird sie um **+1** inkrementiert. Sie kann vom Anwender nur im Status **READY** editiert werden.

Anmerkung

100 Zeichen

Frei definierbare Anmerkung zur Bestimmung, die zusammen mit der Bestimmung gespeichert wird. Anstelle einer manuellen Eingabe können auch vorbereitete Textvorlagen ausgewählt werden.

Hinweis

Das Feld **Anmerkung** kann auch bei laufenden Bestimmungen live geändert werden. Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Anmerkung ändern** öffnet sich das Fenster **Live-Änderungen**.

Autostart

1 ... 999, [Probentabelle]

Anzahl automatischer, interner Starts von Bestimmungen innerhalb einer Probenserie.

Das erste Feld nach **Autostart** zeigt die Anzahl der bereits durchgeführten Bestimmungen an (Ist-Zähler). Dieses Feld ist nicht editierbar, es kann aber im Status **READY** oder **PAUSE** mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Autostartzähler zurücksetzen** wieder auf **0** gesetzt werden.

Das zweite Feld nach **Autostart** zeigt die totale Anzahl der Bestimmungen an, die pro Serie durchgeführt werden sollen (Soll-Zähler). Es enthält standardmässig den Eintrag **Probentabelle**, der die Anzahl Zeilen der Arbeitsprobentabelle bezeichnet. Dieses Feld ist nur im Status **READY** editierbar.

Hinweis

Das zweite Feld nach **Autostart** kann auch bei einer laufenden Serie live geändert werden. Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Autostartzähler ändern** öffnet sich das Fenster **Live-Änderungen**.

Statistik

[ein], aus


Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn eine Methode geladen ist, in deren **START**-Befehl die Option **Statistik** eingeschaltet ist. Die in der Methode definierte Statistik kann hier manuell ein- und ausgeschaltet werden (nur im Status **READY**).

Das erste Feld nach **Statistik** zeigt die Anzahl bereits durchgeführter Bestimmungen für die Statistik an (Ist-Zähler). Dieses Feld ist nicht editierbar, es kann aber im Status **READY** mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Statistik löschen** auf **0** gesetzt werden, wobei gleichzeitig die bereits berechneten Statistikdaten gelöscht werden.

Das zweite Feld nach **Statistik** zeigt die Anzahl durchzuführender Bestimmungen für die Statistik an (Soll-Zähler). Es enthält standardmässig den im **START**-Befehl definierten Wert **Anzahl Einzelbestimmungen**. Dieses Feld ist nur im Status **READY** editierbar.

Anmerkung ändern

Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Anmerkung ändern** öffnet sich das Dialogfenster **Live-Änderungen**, in dem die Anmerkung während einer laufenden Bestimmung live geändert werden kann.

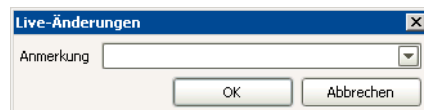

Anmerkung

100 Zeichen

Frei definierbare Anmerkung zur Bestimmung, die zusammen mit der Bestimmung gespeichert wird. Anstelle einer manuellen Eingabe können auch vorbereitete Textvorlagen ausgewählt werden.

Autostartzähler ändern

Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Autostartzähler ändern** öffnet sich das Dialogfenster **Live-Änderungen**, in dem die Anmerkung während einer laufenden Bestimmung live geändert werden kann.



Autostart

1 ... 999, [Probentabelle]

Anzahl automatischer, interner Starts von Bestimmungen innerhalb einer Probenserie.

Das erste, nicht editierbare Feld nach **Autostart** zeigt die Anzahl der bereits durchgeführten Bestimmungen an (Ist-Zähler).

Das zweite, editierbare Feld nach **Autostart** zeigt die totale Anzahl der Bestimmungen an, die pro Serie durchgeführt werden sollen (Soll-Zähler).

Probedaten

Unter **Probedaten** wird die aktuelle Arbeitsprobentabelle angezeigt, welche die Probedaten für Bestimmungsserien in Tabellenform enthält, wobei jede Zeile einer einzelnen Bestimmung entspricht.

Arbeitsprobentabelle

Die Tabelle enthält die in der Probentabelle bereits gespeicherten Probedatenzeilen sowie eine Zeile für die Eingabe von neuen Daten, die anstelle der Zeilennummer einen Stern enthält. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar und nicht sortierbar.

Zur Bedeutung der Spalten siehe Probedaten bearbeiten.

Die Zeilen in der Arbeitsprobentabelle können verschiedene Hintergrundfarben aufweisen:

Hellgrauer Hintergrund

Abgearbeitete Zeilen. Daten in diesen Zeilen können nicht mehr geändert werden. Diese Zeilen erscheinen nur, wenn auf der Registerkarte **Abarbeiten** die Option **Zeile nach Abar-beiten löschen** ausgeschaltet ist.

Dunkelgrauer Hintergrund

Ausgewählte, abgearbeitete Zeile.

Helloranger Hintergrund

Aktuell laufende Zeile.

Dunkeloranger Hintergrund

Ausgewählte, aktuelle laufende Zeile. Falls Probedaten erst nach dem Start der Bestimmung (im Status **BUSY**) geändert werden, gilt dies als Live-Änderung.

Weisser Hintergrund

Zeilen, die noch nicht abgearbeitet sind. Diese Zeilen können editiert werden.

Türkis Hintergrund

Selektierte, noch nicht abgearbeitete Zeile.

Geladen

Anzeige der Probentabelle, deren Daten mit **Probentabelle, Laden...** in die Arbeitsprobentabelle geladen wurden. Wurde keine Probentabelle geladen oder wurden alle Zeilen gelöscht, ist dieses Feld leer. Werden Daten einer geladenen Probentabelle nachträglich geändert oder mit neuen Zeilen ergänzt, so wird zusätzlich zum Namen (**geändert**) angezeigt.

Zu den Möglichkeiten der Bearbeitung der Arbeitsprobentabelle und den Fenstermenüs siehe Arbeitsprobentabelle bearbeiten.

Bestimmungsablauf

Bei einer Serie von Bestimmungen, die auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** im Unterfenster **Ablauf** gestartet wird, läuft jede Bestimmung wie folgt ab:

1 - Laden der Probedaten

Die in der Arbeitsprobentabelle auf der aktuellen Zeile eingetragenen Probedaten für die Bestimmung werden geladen.

2 - Methodenwahl

Bei der Methodenwahl werden folgende Aktionen ausgelöst:

- **Methodenwahl ohne Zuordnungs-ID**
Ist die Option **Methodenwahl mit Zuordnungs-ID** auf der Registerkarte **Abarbeiten** nicht eingeschaltet, bleibt die im Feld **Methode** ausgewählte Methode geladen.
- **Methodenwahl mit Zuordnungs-ID**
Ist die Option **Methodenwahl mit Zuordnungs-ID** auf der Registerkarte **Abarbeiten** eingeschaltet, wird anhand der **Probenzuordnungs-ID** die in der **Probenzuordnungstabelle** definierte Methode geladen.

3 - Starttest

Beim Starttest werden folgende Überprüfungen und Aktionen ausgelöst:

- **Berechtigung zum Ausführen der Methode?**
Überprüfung, ob der angemeldete Anwender die Berechtigung für das Ausführen der verlangten Methode besitzt.
- **Methode ablauffähig?**
Überprüfung, ob die verlangte Methode ablauffähig ist. Bei nicht ablauffähigen Methoden erscheint die Aufforderung, den Methodentest durchzuführen und die Methode entsprechend zu ändern.
- **Geräte(module) und Rack prüfen**
Prüfung, ob die in den gerätespezifischen Befehlen verlangten Geräte (bzw. Gerätetypen), Gerätemodule (z.B. Messeingang, Turm, etc.) und Racks vorhanden und verfügbar bzw. zugeordnet sind. Falls das Gerät in einem Befehl noch nicht zugeordnet ist, erscheint das Fenster **Gerätezuordnung** für die Zuordnung des Gerätes.
- **Lösungen prüfen**
Prüfung, ob die in den gerätespezifischen Befehlen verlangten Lösungen vorhanden und verfügbar sind.
- **Sensoren prüfen**
Prüfung, ob die in den gerätespezifischen Befehlen verlangten Sensoren vorhanden und verfügbar sind.
- **Probedaten prüfen**
Prüfung, ob die eingegebenen Probedaten den definierten Methodenvariablen entsprechen und gültig sind.

Hinweis

Der Starttest für die unter **Autostart** definierte Anzahl Zeilen kann im Status **READY** auch manuell mit den Menüpunkten **Extras, Ablauftest** oder **Probentabelle, Ablauftest** ausgelöst werden.

4 - Vorkonditionieren (nur bei Methoden mit Konditionieren)

Bei Methoden, die Befehle mit eingeschaltetem Konditionieren enthalten, wird für alle diese Befehle das Vorkonditionieren gestartet, wenn die Option **Automatisches Konditionieren** im **START**-Befehl eingeschaltet ist. Das Vorkonditionieren gehört noch nicht zur Bestimmung und inkrementiert keine Zähler (**Probennummer**, **Statistik**).

- **Konditionierbedingung nicht erfüllt**
Nach dem Start des Vorkonditionierens wechselt der Status auf **COND BUSY**. In diesem Zustand kann das Konditionieren mit **[Hold]** unterbrochen und mit **[Cont]** fortgesetzt werden. Tritt beim Konditionieren ein Fehler auf, wird weder die Fehlerspur noch die Exitspur durchlaufen.
- **Konditionierbedingung erfüllt**
Ist die Konditionierbedingung erfüllt, wechselt der Status auf **COND READY**. Danach wird automatisch die Methode gestartet.

5 - Methodenstart

Beim Methodenstart werden folgende Überprüfungen und Aktionen ausgelöst:

- **Bestimmungs-ID vergeben**
Für die Bestimmung wird eine eindeutige Bestimmungs-ID vergeben.
- **Geräte(module) reservieren**
Die von den geräteabhängigen Befehlen der Methode verwendeten Geräte bzw. deren Funktionseinheiten werden für die Dauer der Bestimmung reserviert, d.h. sie können weder in anderen Arbeitsplätzen verwendet noch manuell bedient werden.
- **Probennummer erhöhen**
Die **Probennummer** wird um **+1** erhöht.
- **Statistikzähler erhöhen**
Ist die Statistik sowohl im **START**-Befehl wie auch auf der Registerkarte **Einzelbestimmungen** eingeschaltet, wird der Statistikzähler um **+1** erhöht. Falls eine neue Methode geladen wurde oder der Statistikzähler dem Sollzähler entspricht, werden zuvor die aktuellen Statistikdaten gelöscht und der Statistikzähler auf **0** gesetzt.

6 - Hauptablauf

Beim Abarbeiten der geladenen Methode können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- **Seriestartspur abarbeiten**
Zu Beginn der ersten Bestimmung einer Serie wird die Seriestartspur gestartet. Wird während des Ablaufs dieser Spur **[Stop]** gedrückt, wird die Exitspur gestartet, tritt ein Fehler auf, die Fehlerspur.
- **Hauptspur abarbeiten**
Nach dem Start der Hauptspur wechselt der Status auf **BUSY**. Die Befehle der Hauptspur und der von ihr aufgerufenen anderen Spuren werden der Reihe nach abgearbeitet. Werden von der Hauptspur Spuren aufgerufen, die nicht frei sind, wird gewartet, bis diese Spuren gestartet werden können.
- **Ablauf anhalten und weiterführen**
Eine laufende Bestimmung kann jederzeit mit **[Hold]** unterbrochen und mit **[Cont]** fortgesetzt werden. Dabei werden alle aktiven Spuren gemeinsam angehalten und fortgesetzt.
- **Serie anhalten und weiterführen**
Eine laufende Serie kann jederzeit mit **[Pause]** unterbrochen werden. Dabei wird die laufende Bestimmung der Probenserie noch zu Ende

geführt, aber keine neue Bestimmung mehr gestartet. Mit **[Cont]** wird die nächste Bestimmung der unterbrochenen Probenserie gestartet.

- **Ablauf abbrechen**
Eine laufende Bestimmung kann jederzeit mit **[Stop]** abgebrochen werden. Anschliessend wird eine allfällige Exitspur durchlaufen und die Bestimmung beendet.
- **Abbruch durch Fehler**
Tritt bei einer laufenden Bestimmung ein Fehler auf, der zum Abbruch der Bestimmung führt, wird eine allfällige Fehlerspur durchlaufen und die Bestimmung beendet.
- **Exitspur abarbeiten**
Sind die Hauptsur und sämtliche von ihr aufgerufenen Spuren beendet, wird eine allfällige Exitspur durchlaufen und die Bestimmung beendet.
- **Serieendspur abarbeiten**
Am Ende der letzten Bestimmung einer Serie wird die Serieendspur gestartet. Wird während des Ablaufs dieser Spur **[Stop]** gedrückt, wird die Bestimmung beendet, tritt ein Fehler auf, die Fehlerspur.

7 - Nachkonditionieren (nur bei Methoden mit Konditionieren)

Bei Methoden, die Befehle mit eingeschaltetem Konditionieren enthalten und bei denen die Option **Automatisches Konditionieren** im **START**-Befehl eingeschaltet ist, wird für alle diese Befehle automatisch das Nachkonditionieren mit der geladenen Methode gestartet, und zwar unmittelbar nach dem Ende der Spur, die den Konditionierbefehl enthält. Nach dem Start des Nachkonditionierens wechselt der Status auf **COND BUSY**. In diesem Zustand kann das Konditionieren mit **[Stop]** abgebrochen oder mit **[Hold]** unterbrochen und mit **[Cont]** fortgesetzt werden. Tritt beim Konditionieren ein Fehler auf, wird weder die Fehlerspur noch die Exitspur durchlaufen.

- **Konditionieren zwischen zwei Bestimmungen**
Das Konditionieren läuft solange, bis die neue Methode für die nächste Bestimmung geladen ist.
- **Konditionieren am Ende der letzten Bestimmung**
Nach Beendigung der Serieendspur wird solange konditioniert, bis das Konditionieren mit **[Stop]** abgebrochen wird.

Gerätezuordnung

Wird beim Starttest festgestellt, das für einen geräteabhängigen Befehl noch kein Gerät zugeordnet ist, erscheint das Fenster **Gerätezuordnung**:

Befehltyp

Anzeige des Befehlstyps.

Befehlsname

Anzeige des Befehlsnamens.

Gerätetyp

Anzeige des im Befehl ausgewählten Gerätetyps.

Gerätename

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.


Arbeitsprobentabelle

Neue leere Probentabelle laden

Mit dem Menüpunkt **Probentabelle, Neu** auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** wird eine neue, leere Probentabelle als Arbeitsprobentabelle geladen, d.h. alle bestehenden Probedatenzeilen werden gelöscht.

Probentabelle laden

Mit dem Menüpunkt **Probentabelle, Laden...** auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** wird das Fenster **Probentabelle laden** geöffnet, in dem eine der global verfügbaren Probentabellen ausgewählt werden kann, die als Arbeitsprobentabelle geladen werden soll.

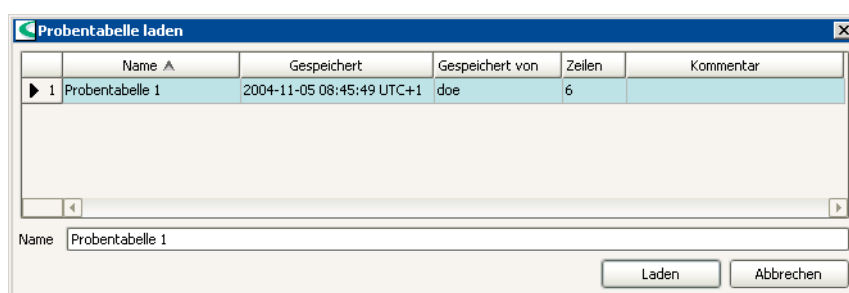

Liste der Probentabellen

Die Liste der Probentabellen enthält Informationen zu allen gespeicherten Probentabellen. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Gespeichert**, **Gespeichert von**, **Zeilen**, **Kommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Probentabelle.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Probentabelle.

Gespeichert von

Kurzname des Anwenders, welcher die Probentabelle gespeichert hat.

Zeilen

Anzahl Zeilen der Probentabelle.

Kommentar

Kommentar zur Probentabelle, der auf der Registerkarte **Kommentar** als Kommentar zur Probentabelle eingegeben wurde.

Probentabelle laden

Name

50 Zeichen

Name der Probentabelle, die geladen werden soll. Wird eine der Probentabellen in der Tabelle ausgewählt, wird der Name automatisch in diesem Feld eingetragen. Er kann aber auch manuell eingegeben werden.

Laden

Die Daten der ausgewählten Probestabelle werden in die Arbeitsprobentabelle geladen. Zusätzlich werden auch alle Eigenschaften der Probestabelle mit Ausnahme der Einstellungen für **Import von Datei** und **Importformat** für die Arbeitsprobentabelle übernommen.

Arbeitsprobentabelle bearbeiten

Die Tabelle enthält die in der Probestabelle bereits gespeicherten Probedatenzeilen sowie eine Zeile für die Eingabe von neuen Daten, die anstelle der Zeilennummer einen Stern enthält. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar und nicht sortierbar.

Zur Bedeutung der Spalten siehe Probedaten bearbeiten.

Die Zeilen in der Arbeitsprobentabelle können verschiedene Hintergrundfarben aufweisen:

Hellgrauer Hintergrund

Abgearbeitete Zeilen. Daten in diesen Zeilen können nicht mehr geändert werden. Diese Zeilen erscheinen nur, wenn auf der Registerkarte **Abarbeiten** die Option **Zeile nach Abarbeiten löschen** ausgeschaltet ist.

Dunkelgrauer Hintergrund

Ausgewählte, abgearbeitete Zeile.

Helloranger Hintergrund

Aktuell laufende Zeile.

Dunkeloranger Hintergrund

Ausgewählte, aktuelle laufende Zeile. Falls Probedaten erst nach dem Start der Bestimmung (im Status **BUSY**) geändert werden, gilt dies als Live-Änderung.

Weisser Hintergrund

Zeilen, die noch nicht abgearbeitet sind. Diese Zeilen können editiert werden.

Türkis Hintergrund

Selektierte, noch nicht abgearbeitete Zeile.

Geladen

Anzeige der Probestabelle, deren Daten mit **Probestabelle, Laden...** in die Arbeitsprobentabelle geladen wurden. Wurde keine Probestabelle geladen oder wurden alle Zeilen gelöscht, ist dieses Feld leer. Werden Daten einer geladenen Probestabelle nachträglich geändert oder mit neuen Zeilen ergänzt, so wird zusätzlich zum Namen (**geändert**) angezeigt.

Fenstermenüs

Bearbeiten ▼

Das Menü **Bearbeiten** unterhalb der Arbeitsprobentabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Zeile bearbeiten

Fenster **Zeile bearbeiten** öffnen, in dem die Probedaten der fokussierten Zeile bearbeitet werden können.

Neue Zeile einfügen

Neue, leere Zeile oberhalb der fokussierten Zeile einfügen. Dabei wird automatisch das Fenster **Zeile bearbeiten** geöffnet, in dem die Probedaten der neuen Zeile bearbeitet werden können.

Zeilen ausschneiden

Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage übertragen.

Zeilen kopieren

Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage kopieren.

Zeilen einfügen

Zeilen aus der Zwischenablage oberhalb der fokussierten Zeile einfügen.

Zeilen löschen

Ausgewählte Zeilen löschen.

Inkrementieren

Mit dem Cursor, der die Form  annimmt, kann in der Tabelle der Bereich in einer Spalte ausgewählt werden, der automatisch inkrementiert werden soll. Dabei wird in den ausgewählten Zellen einer Spalte (**Probenposition, ID1...ID8**) ausgehend von der ersten ausgewählten Zelle die am Ende des Ausdruckes stehende Zahl automatisch um 1 erhöht. Dies funktioniert sowohl mit reinen Zahlen wie mit Textausdrücken, an deren Ende eine Zahl steht (z.B. **ABC10** → **ABC11** → **ABC12** ...).

Zeilen markieren

Ausgewählte Zeilen mit einer Markierung (roter Hintergrund für Zeilenzahl) kennzeichnen. Vor dem Start einer solchen Zeile werden die bei den Eigenschaften auf der Registerkarte **Arbeiten** festgelegten entsprechenden Aktionen ausgelöst.

Zeilenmarkierung entfernen

Zeilenmarkierung für die ausgewählten Zeilen wieder entfernen.

Zeilen nicht ausführbar setzen

Ausgewählte Zeilen auf "nicht ausführbar" setzen, d.h. diese Zeilen werden im Ablauf nicht ausgeführt. Solche Zeilen werden mit einer roten Linie durchgestrichen.

Zeilen ausführbar setzen

Ausgewählte Zeilen auf "ausführbar" setzen, d.h. sie werden im Ablauf ausgeführt.



Das Menü **Probentabelle** unterhalb der Arbeitsprobentabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu

Neue, leere Probentabelle laden.

Laden...

Gespeicherte Probentabelle in die Arbeitsprobentabelle laden. Es öffnet sich das Fenster **Probentabelle laden** für die Auswahl der Probentabelle.

Speichern unter...

Öffnen des Fensters **Probentabelle speichern** für das Speichern der aktuellen Probentabelle unter einem neuen Namen.

Ablauftest...

Ablauftest für die unter **Autostart** definierte Anzahl Zeilen in der Arbeitsprobentabelle durchführen.

Drucken (PDF)

Öffnen des Fensters **Probentabelle drucken (PDF)**, in dem das Ausgabeformat definiert werden kann. Anschliessend wird die Probentabelle als PDF-Datei ausgegeben.

Eigenschaften...

Fenster **Eigenschaften - Probentabelle** öffnen, in dem die Eigenschaften für die ausgewählte Probentabelle eingestellt werden können.

Daten importieren...

Fenster **Datei für Import auswählen** für den Import von externen Daten öffnen.

Zurücksetzen

Alle abgearbeiteten Probedatenzeilen in den Zustand "nicht abgearbeitet" zurücksetzen.

Zeilen verschieben per Drag & Drop

Die in der Probentabelle ausgewählten Zeilen können per Drag&Drop in eine geöffnete Probentabelle verschoben werden.

Zeilen kopieren per Drag & Drop

Die in der Probentabelle ausgewählten Zeilen können bei gedrückter linker Maustaste per Drag&Drop in eine geöffnete Probentabelle kopiert werden.

Probedaten bearbeiten

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Zeile bearbeiten** auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** öffnet sich das Dialogfenster **Zeile bearbeiten**.

Die Felder in diesem Dialogfenster weisen dieselben Hintergrundfarben auf wie die Zeilen in der Arbeitsprobentabelle:

Hellgrauer Hintergrund

Abgearbeitete Zeile, deren Daten nicht mehr geändert werden können.

Oranger Hintergrund

Aktuell laufende Zeile. Falls Probedaten erst nach dem Start der Bestimmung (im Status **BUSY**) geändert werden, gilt dies als Live-Änderung.

Weisser Hintergrund

Zeile, die noch nicht abgearbeitet ist und editiert werden kann.

Hinweis

In den Feldern dieses Dialogfensters ist generell keine Formeleingabe möglich.

Methode

50 Zeichen, Methodenauswahl

Eingabe oder Auswahl der Methode aus der aktuellen Methodengruppe, mit der die Bestimmung durchgeführt werden soll.



Öffnen des Fensters Methode öffnen für die erweiterte Methodenwahl, falls mehrere Methodengruppen vorhanden sind. Wird in diesem Fenster eine Methode aus einer anderen als der aktuellen Methodengruppe ausgewählt, ist diese Gruppe fortan die aktuelle Methodengruppe für die Schnellauswahl von Methoden im Feld **Methode**.

Probenposition

[1] ... 999

Position der Probe auf dem Rack. Diese Nummer dient zum Anfahren der Probenposition mit dem Befehl **MOVE**. Dazu muss dort **Zielposition = Probenposition** gesetzt werden.

ID1 ... ID8

50 Zeichen, Auswahl aus Textvorlagen

Probenidentifikationen ID1...ID8. In diesem Feld kann beliebiger Text eingegeben werden, die Überprüfung auf Typ und Grenzwerte erfolgt erst beim Start der Bestimmung. Für Probenidentifikationen vom Typ Datum/Zeit muss die Eingabe im Format **JJJJ-MM-TT hh:mm:ss** erfolgen. Sind Textvorlagen für die Probenidentifikation definiert, können diese ausgewählt werden.

Einmass

[1.0], Zahl mit max. 10 Ziffern

Probeneinmass (Einwaage). In diesem Feld können nur Zahlen, Dezimalpunkt, +, -, E und e eingegeben werden. Die Überprüfung auf Grenzwerte erfolgt erst beim Start der Bestimmung.

Einheit


16 Zeichen, [g], mg, µg, mL, µL, Stück

Einheit des Probeneinmasses (Einwaage). In diesem Feld kann beliebiger Text eingegeben werden.

Hinweis

Werden Daten der aktuellen Probedatenzeile für die laufende Bestimmung geändert, gilt dies als Live-Änderung. Ist die Option **Kommentar bei Änderung von Probedaten** in den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, so erscheint vor der Speicherung das Fenster **Änderungskommentar Probedaten** (siehe Unterfenster Ablauf - Einzelbestimmung - Änderungskommentar für Probedaten).

Navigation

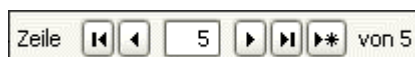

Anzeige der aktuell ausgewählten Zeile in der Arbeitsprobentabelle mit den folgenden Funktionen:



Sprung zur ersten Zeile in der Arbeitsprobentabelle.



Sprung zur vorhergehenden Zeile in der Arbeitsprobentabelle.



Möglichkeit zur Eingabe der gewünschten Zeilenzahl, zu der nach Betätigen von [Enter] direkt gesprungen wird.



Sprung zur nächsten Zeile in der Arbeitsprobentabelle. Ist das Ende der Tabelle erreicht, wird automatisch eine neue Zeile generiert und zu dieser gesprungen. Dabei wird die Zeilenzahl um **+1** erhöht.



Sprung zur letzten Zeile in der Arbeitsprobentabelle.



Sprung zu einer neuen, leeren Zeile. Dabei wird die Zeilenzahl um **+1** erhöht.

Funktionen



Übernahme der eingetragenen Probedaten in die entsprechende Zeile der Arbeitsprobentabelle. Ist das Ende der Tabelle erreicht, wird automatisch eine neue Zeile generiert. Die gleiche Funktion kann auch durch Drücken der Taste [Enter] ausgelöst werden. Mit [Enter] wird aber zusätzlich auch automatisch zur nächsten Zeile weitergeschaltet.



Schliessen des Eingabefensters. Die aktuellen Probedaten werden dabei nicht in die Arbeitsprobentabelle übernommen (dies muss zuvor mit **[Übernehmen]** ausgelöst werden).

Probedaten importieren

Mit dem Menüpunkt **Probentabelle, Daten importieren...** auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** öffnet sich das Dialogfenster **Dateien für Import auswählen**, in dem die Datei ausgewählt werden muss, von der Probedaten importiert werden sollen.

Dateiname

Dateiname

Eingabe oder Auswahl der Datei, von der importiert werden soll.

Dateityp

[*.csv]

Auswahl des Importformats für den Import von Daten aus einer Datei.

Öffnen


Die Probedaten aus der ausgewählten Datei werden am Schluss der Arbeitsprobentabelle eingefügt. Dabei werden für jede Zeile Daten für die auf der Registerkarte **Anzeige** definierte Anzahl Datenfelder in der dort aufgeführten Reihenfolge erwartet.

Hinweis

Die Importdatei muss für jede Zeile unabhängig von der auf der Registerkarte **Anzeige** definierten Anzahl Datenfelder immer sämtliche Probedaten im Format **Methodenname;Probenposition;ID1;ID2;ID3;ID4;ID5;ID6;ID7;ID8;Einmass;Einheit** enthalten.

Probedaten speichern

Mit dem Menüpunkt **Probentabelle, Speichern unter...** auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** wird das Fenster **Probentabelle speichern** geöffnet, in dem ein Name für die zu speichernde Arbeitsprobentabelle eingegeben oder ausgewählt werden kann.

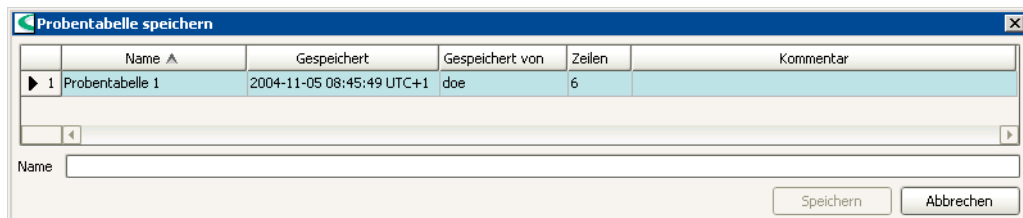

Liste der Probentabellen

Die Liste der Probentabellen enthält Informationen zu allen gespeicherten Probentabellen.

Name

Name der Probentabelle.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Probentabelle.

Gespeichert von

Kurzname des Anwenders, welcher die Probentabelle gespeichert hat.

Zeilen

Anzahl Zeilen der Probentabelle.

Kommentar

Kommentar zur Probentabelle, der auf der Registerkarte **Kommentar** als Kommentar zur Probentabelle eingegeben wurde.

Probentabelle speichern

Name

50 Zeichen

Eingabe des Namens, unter dem die Arbeitsprobentabelle gespeichert werden soll.

Hinweis

Der Name der Probentabelle muss im ganzen Client/Serversystem eindeutig sein.

Speichern

Speichert die Arbeitsprobentabelle unter dem gewünschten Namen.

Ablauftest

Auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** wird mit  oder den Menüpunkten **Extras**, **Ablauftest** oder **Probentabelle**, **Ablauftest** für die unter **Autostart** definierte Anzahl Zeilen in der Arbeitsprobentabelle der Starttest durchgeführt. Bedingung dafür ist, dass sich der Arbeitsplatz im Zustand **READY** befindet.

Zeile

Anzeige der Zeilennummer der aktuell getesteten Probedatenzeile für die Bestimmungsserie.

Statusanzeigen

Unterhalb der Zeilennummer erscheint eine der folgenden Statusanzeigen:

Ablauftest läuft...

Diese Anzeige erscheint während des Ablaufs des Tests. Zusätzlich erscheint ein Fortschrittsbalken, der Test kann dabei mit  neben dem Balken abgebrochen werden.

Fehler beim Ablauftest

Diese Anzeige erscheint, wenn beim Ablauftest ein Fehler aufgetreten ist. Anhand der angezeigten Zeilennummer kann der Anwender bei einer Bestimmungsserie feststellen, zu welcher Zeile die beim Fehler auftretende und im üblichen Meldungsfenster angezeigte Fehlermeldung gehört.

Ablauftest manuell abgebrochen

Diese Anzeige erscheint, wenn der Ablauftest vom Anwender manuell abgebrochen wurde.

Ablauftest fehlerfrei beendet

Diese Anzeige erscheint am Ende des fehlerfrei abgelaufenen Ablauftests

Arbeitsprobentabelle drucken (PDF)

Mit dem Menüpunkt **Probentabelle, Drucken (PDF)...** auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** wird das Fenster **Probentabelle drucken (PDF)** geöffnet, in dem das Ausgabeformat für die PDF-Ausgabe ausgewählt werden kann.



Ausrichtung

Hochformat

[ein], aus

Ausgabe im Hochformat.

Querformat

[ein], aus

Ausgabe im Querformat.

Eigenschaften

Die Eigenschaften für die Registerkarte **Bestimmungsserie** werden auf den folgenden 5 Registerkarten eingestellt:

- **Anzeige**
Definition der Spalten, die in der Arbeitsprobentabelle angezeigt werden sollen.
- **Bearbeiten**
Optionen für das Bearbeiten der Arbeitsprobentabelle auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** und im Dialogfenster **Zeile bearbeiten**.
- **Abarbeiten**
Optionen für das Abarbeiten der Arbeitsprobentabelle auf der Registerkarte **Bestimmungsserie**.
- **Datenimport**
Ein-/Ausschalten des Imports von externen Daten für Felder der Arbeitsprobentabelle.
- **Kommentar**
Eingabe eines Kommentars zur Arbeitsprobentabelle.

Anzeige

Definition der Bedienungselemente und Spalten, die auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** angezeigt werden sollen.

Bedienungselemente

[Pause] / [Cont]

[ein], aus

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Bedienungstasten **[Pause]** bzw. **[Cont]**.

[Hold] / [Cont]

[ein], aus

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Bedienungstasten **[Hold]** bzw. **[Cont]**.

Bestimmungsparameter

Probennummer

[ein], aus

Ein-/Ausschalten der Anzeige des Feldes **Probennummer**.

Anwender

[ein], aus

Ein-/Ausschalten der Anzeige des Feldes **Anwender**.

Anmerkung

[ein], aus

Ein-/Ausschalten der Anzeige des Feldes **Anmerkung**.

Statistik

[ein], aus

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Statistikfelder.

Probedaten

Probenposition

[ein], aus

[**Probenposition**], 50 Zeichen

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Probenposition** in der Arbeitsprobentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

ID1 ... ID3

[ein], aus

[**ID1...3**], 50 Zeichen

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalten **ID1...ID3** in der Arbeitsprobentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

ID4 ... ID8

ein, [aus]

[**ID4...8**], 50 Zeichen

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalten **ID4...ID8** in der Arbeitsprobentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Einmass

[ein], aus

[**Einmass**], 50 Zeichen

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Einmass** in der Arbeitsprobentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Einheit

[ein], aus

[**Einheit**], 50 Zeichen

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Einheit** in der Arbeitsprobentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Hinweis

Für die Bestimmungsdaten werden immer die im **START**-Befehl unter **Methodenvariablen** definierten Namen verwendet.

Bearbeiten

Optionen für das Bearbeiten der Arbeitsprobentabelle auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** und im Dialogfenster **Zeile bearbeiten**.

The screenshot shows a dialog box titled 'Eigenschaften - Bestimmungsserie'. It has five tabs: 'Anzeige', 'Bearbeiten' (selected), 'Abarbeiten', 'Datenimport', and 'Kommentar'. In the 'Bearbeiten' tab, there is a 'Standard-Methodengruppe' dropdown set to 'Hauptgruppe'. Below it are two checkboxes: 'Daten übernehmen mit' (set to 'Einmass') and 'Bearbeiten in Arbeitsprobentabelle sperren'. A section titled 'Automatisch in nächste Zeile kopieren' contains several checkboxes: 'Methode' (checked), 'ID1' (checked), 'ID2' (checked), 'ID3' (checked), 'ID4' (unchecked), 'ID5' (unchecked), 'ID6' (unchecked), 'ID7' (unchecked), 'ID8' (unchecked), 'Einheit' (checked), and 'Probenposition + 1' (checked). At the bottom are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Standard-Methodengruppe

[Hauptgruppe], Methodengruppen

Auswahl der Standard-Methodengruppe für die Auswahl von Methoden in der Arbeitsprobentabelle.

Daten übernehmen mit

ein, [aus]

ID1 ... ID8, [Einmass], Einheit, Probenposition

Auswahl des Datenfeldes, das beim automatischen Datenimport via Waage, Barcodeleser oder Datei gefüllt sein muss, damit die Daten der Zeile in den Probedatenspeicher übernommen werden und zur nächsten Zeile weitergeschaltet wird. Ist die betreffende Spalte leer, werden weitere importierte Daten in die gleiche Zeile geschrieben. So ist es z.B. möglich, zuerst Probenidentifikationen via Barcodeleser in eine Zeile einzufüllen, und danach das Einmass für die gleiche Zeile von einer Waage zu übernehmen.

Hinweis

Diese Option hat bei der manuellen Dateneingabe keine Bedeutung.

Bearbeiten in Arbeitsprobentabelle sperren

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird das Bearbeiten von Zeilen der in die Arbeitsprobentabelle geladenen Proben tabellen gesperrt.

Automatisch in nächste Zeile kopieren

Methode

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probedatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

ID1 ... ID3

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probedatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

ID4 ... ID8

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probedatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

Einmass

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probedatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

Einheit

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probedatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.


Probenposition + 1

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probedatenzeile automatisch um **+1** inkrementiert.

Abarbeiten

Optionen für das Abarbeiten der Arbeitsprobentabelle auf der Registerkarte **Bestimmungsserie**.

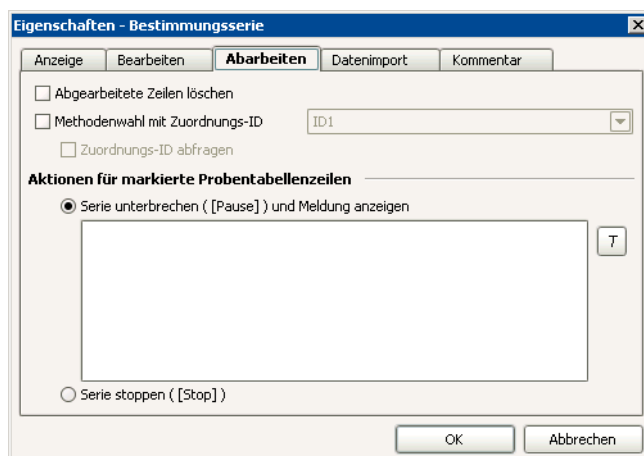

Abgearbeitete Zeilen löschen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden fertig abgearbeitete Zeilen in der Arbeitsprobentabelle automatisch gelöscht.

Methodenwahl mit Zuordnungs-ID

ein, [aus]

[ID1] ... ID8

Ist diese Option eingeschaltet, wird die ausgewählte Probenidentifikation für die Methodenwahl in der Arbeitsprobentabelle verwendet. Diese Identifikation erhält die nicht mehr änderbare Bezeichnung **Zuordnungs-ID**. Stimmt diese ID mit einer der Zuordnungs-ID's aus der Probenzuordnungstabelle überein, so wird die entsprechende Methode aus dieser Tabelle im Feld **Methode** eingetragen.

Zuordnungs-ID abfragen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird die **Zuordnungs-ID** unmittelbar nach dem Start der Bestimmung im Dialogfenster **Probenzuordnung** (siehe *Arbeitsplatz - Extras - Probenzuordnungstabelle - Probenzuordnungsabfrage*) abgefragt.

Aktion für markierte Probentabellenzeilen

Serie unterbrechen ([Pause]) und Meldung anzeigen

[ein], aus
1000 Zeichen

Ist diese Option ausgewählt, wird die Serie vor dem Start der markierten Zeile unterbrochen (entspricht **[Pause]**). Gleichzeitig erscheint eine Meldung, welche auch den im Meldungsfeld definierten Text enthält.

Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verändert werden kann. Innerhalb des Textfeldes kann auch der Formeleditor aufgerufen werden.


Serie stoppen ([Stop])

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, wird die Serie vor dem Start der markierten Zeile gestoppt (entspricht **[Stop]**).

Datenimport

Ein-/Ausschalten des Imports von externen Daten für Felder der Arbeitsprobentabelle.

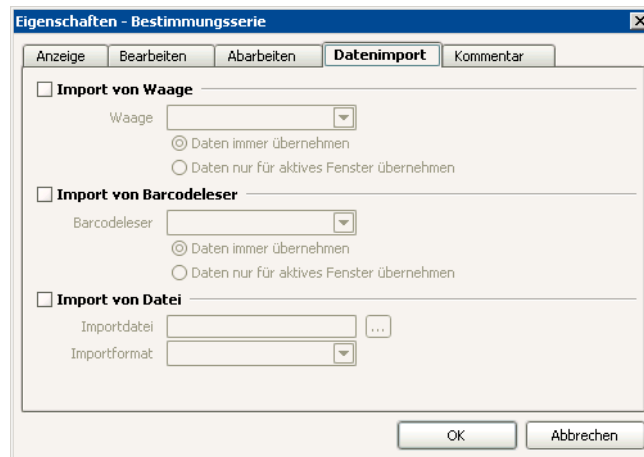

Import von Waage

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden externen Daten von der ausgewählten Waage in die Arbeitsprobentabelle importiert. Daten können in die Felder **ID1...ID4**, **Einmass** und **Einheit** importiert werden.

Hinweis

Um Probenidentifikationen von der Waage importieren zu können, muss an der Waage der Datenexport entsprechend eingestellt werden (Bezeichnungen **ID1**, **ID2**, **ID3**, **ID4** verwenden).

Waage

Gerätename

Auswahl der Waage, von der Daten importiert werden sollen.

Daten immer übernehmen

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, werden die von der Waage geschickten Daten in alle Arbeitsprobentabellen der geöffneten Arbeitsplätze importiert, bei denen diese Waage als Datenquelle definiert ist.

Daten nur für aktives Fenster übernehmen

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, werden die von der Waage geschickten Daten nur in die Arbeitsprobentabelle desjenigen Arbeitsplatzes importiert, welcher aktiv ausgewählt ist.

Import von Barcodeleser

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden externen Daten vom ausgewählten Barcodelesegerät in die Arbeitsprobentabelle importiert. Bei den Geräteeigenschaften des Barcodelesers wird definiert, in welches Feld die Daten importiert werden.

Barcodeleser

Gerätename

Auswahl des Barcodelesers, von dem Daten importiert werden sollen.

Daten immer übernehmen

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, werden die vom Barcodeleser geschickten Daten in alle Arbeitsprobentabellen der geöffneten Arbeitsplätze importiert, bei denen dieser Barcodeleser als Datenquelle definiert ist.

Daten nur für aktives Fenster übernehmen

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, werden die vom Barcodeleser geschickten Daten nur in die Arbeitsprobentabelle desjenigen Arbeitsplatzes importiert, welcher aktiv ausgewählt ist.

Import von Datei

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden externe Daten von einer Datei (z. B. via LIMS) in die Arbeitsprobentabelle importiert. Dabei wird beim Laden einer gespeicherten Probentabelle in die Arbeitsprobentabelle sowie periodisch (alle 10 s) überprüft, ob die angegebene Importdatei vorhanden ist (jedoch nicht, wenn das Dialogfenster **Zeile Bearbeiten** geöffnet ist). Ist die Importdatei vorhanden, werden die Daten aus dieser Datei automatisch am Schluss der Arbeitsprobentabelle eingefügt. Nach jedem Import wird die Importdatei gelöscht.

Hinweis

Die Importdatei muss für jede Zeile unabhängig von der auf der Registerkarte **Anzeige** definierten Anzahl Datenfelder immer sämtliche Probedaten im Format **Methodenname;Probenposition;ID1;ID2;ID3;ID4;ID5;ID6;ID7;ID8;Einmass;Einheit** enthalten.

Importdatei

Dateiname

Eingabe oder Auswahl der Datei, von der importiert werden soll.


Importformat

[*.csv]

Auswahl des Importformats für den Import von Daten aus einer Datei (nur ***.csv** möglich).

Kommentar

Eingabe eines Kommentars zur Arbeitsprobentabelle.

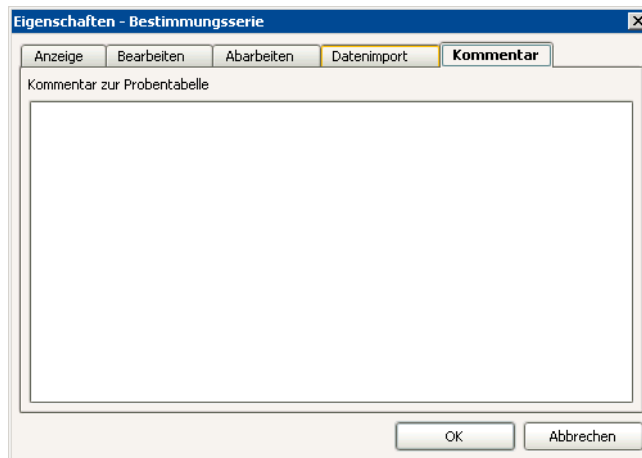

Kommentar zur Probentabelle **1000 Zeichen**

Eingabe eines Kommentars zur Arbeitsprobentabelle.

3.6 Unterfenster Methode

3.6.1 Allgemeines

Unterfenster Methode

Das Unterfenster **Methode** zeigt die im Ablauffenster auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** oder **Bestimmungsserie** geladene Methode mit ihren Spuren und Befehlen, wobei die Darstellung identisch ist zu derjenigen im Methodeneditor. Das Unterfenster kann im Programmteil **Arbeitsplatz** bei der Definition des Layouts eingeschaltet und damit sichtbar gemacht werden. Es kann beliebig vergrößert und verkleinert und auch maximiert werden.

Darstellung der aktiven Spuren und Befehle

Aktive Spuren (Spuren im Zustand **BUSY**) werden mit einem **hellroten** Hintergrund, aktive Befehle (Befehle im Zustand **BUSY**) mit einem **roten** Rahmen markiert. Ist das automatische Konditionieren eingeschaltet, werden Befehle, die am Konditionieren sind, mit einem **orange**n Rahmen markiert.

3.6.2 Zoom für Methodenfenster

Standardmässig wird die Methode im Methodenfenster so dargestellt, dass alle Spuren vollständig angezeigt werden. Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Zoom** können die folgenden Zoomstufen für die Anzeige der Methode ausgewählt werden:

200 %

Ansicht auf 200 % vergrößern.

150 %

Ansicht auf 150 % vergrößern.

100 %

Ansicht auf 100 % einstellen.

75 %

Ansicht auf 75 % verkleinern.

50 %

Ansicht auf 50 % verkleinern.

25 %

Ansicht auf 25% verkleinern.

Auf Breite

Ansicht auf Fensterbreite anpassen.

Auf Höhe

Ansicht auf Fensterhöhe anpassen.

[Einpassen]

Ansicht auf Fensterbreite und -höhe anpassen.

3.6.3 Live-Änderungen

Mit einem Doppelklick auf einen Befehl im Methodenfenster oder dem kontextsensitiven Menüpunkt **Eigenschaften** wird das Eigenschaftenfenster des entsprechenden Befehls geöffnet, in dem alle Parameter angezeigt, aber nur noch die vorgegebenen Live-Parameter editiert werden können. Dieses Parameterfenster enthält zusätzlich die Schaltfläche **[Übernehmen]**, mit dem die veränderten Live-Parameter auch bei geöffnetem Parameterfenster übernommen werden können. Live-Parameter können sowohl im Status **BUSY** wie auch im Status **READY** geändert werden. Ist die Option **Kommentar bei Änderung von Methoden** in den Sicher-

heitseinstellungen eingeschaltet, so erscheint vor der Übernahme der geänderten Daten das Fenster **Änderungskommentar Methode**.

Die geänderten Parameter gelten so lange, bis entweder die Methode gewechselt wird, der Anwender sich abmeldet oder das Programm geschlossen wird. In diesen Fällen erscheint die Meldung, ob die Methode neu gespeichert werden soll. Mit **[Ja]** wird eine neue Methodenversion erstellt, mit **[Nein]** wird die alte Methodenversion beibehalten.

Werden Live-Parameter geändert, so werden diese Änderungen sowohl in der Bestimmung wie im Audit Trail dokumentiert. Im Parameterreport der Bestimmung werden alle Parameter, die geändert wurden, mit einem Stern (*) markiert und am Ende der Bestimmung gespeichert. Werden Parameter bereits abgearbeiteter Befehle verändert, sind diese Änderungen zwar erst bei der nächsten Bestimmung wirksam, sie werden im Methodenreport der abgelaufenen Bestimmung aber trotzdem als "live geändert" markiert. Sobald die Methode regulär gespeichert wird, verschwinden die Markierungen.

Methoden mit geänderten Live-Parametern können im Status **READY** jederzeit auch manuell mit **Datei, Methode, Speichern** oder **Datei, Methode, Speichern unter...** neu gespeichert werden.

Hinweise

Bei Methoden, die auf Stufe 2 unterschrieben und damit gesperrt sind, können keine Live-Parameter editiert werden.

Felder, deren Inhalt durch eine Formel definiert ist, können nicht live geändert werden.

*Wird ein aktiver **SEQUENCE**-Befehl abgebrochen, wird nur der gerade aktive Einzelbefehl aus der Sequenz abgebrochen und der nächste Einzelbefehl gestartet.*

3.6.4 Befehle abbrechen

Befindet sich ein Arbeitsplatz im Status **BUSY**, so kann mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Abbrechen** die Ausführung eines aktiven Befehls sofort abgebrochen und direkt zum nächsten Befehl gesprungen werden. Dies gilt nur für Befehle mit Live-Anzeige. Dieser Abbruch wird in der Bestimmung (unter Meldungen) und im Audit Trail dokumentiert. Die vom abgebrochenen Befehl bisher erzeugten Daten und Variablen werden gespeichert.

3.7 Unterfenster Liveanzeige

3.7.1 Allgemeines

Unterfenster Liveanzeige

In den beiden Unterfenstern **Liveanzeige 1** und **Liveanzeige 2** werden Livekurven, Messwerte und Meldungen zu der im Ablauffenster auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** oder **Bestimmungsserie** gestarteten Methode angezeigt. Die Unterfenster können im Programmteil **Arbeitsplatz** bei der Definition des Layouts eingeschaltet und damit sichtbar gemacht werden. Sie können beliebig vergrößert und verkleinert und auch maximiert werden.

Die Anzeige von Kurven und Messwerten im Livefenster kann pro Fenster und pro Befehlstyp in den Eigenschaften definiert werden.

Registerkarten

Die Unterfenster **Liveanzeige 1** und **Liveanzeige 2** bestehen aus den folgenden Registerkarten:

- **Spuren**
Für jede Spur wird eine Registerkarte angezeigt, die mit dem Namen der Spur beschriftet ist.
- **Applikationsnotiz**
Anzeige der im **START**-Befehl definierten Applikationsnotiz.

3.7.2 Spuren

Für jede Spur der geladenen Methode wird im Unterfenster **Liveanzeige** eine Registerkarte angezeigt, die mit dem Namen der Spur beschriftet ist. Auf diesen Registerkarten werden die in den Eigenschaften definierten Liveansichts-Elemente (Kurve, Messwert, Meldung) zum jeweils aktiven Befehl angezeigt. Die Registerkarten müssen manuell gewechselt werden, d.h. es gibt keine automatische Umschaltung beim Aufruf einer anderen Spur. So ist es möglich, zwei gleichzeitig aktive Spuren nebeneinander in zwei Livefenstern anzuzeigen.

Beim Start der Bestimmung wird der Inhalt der Spur-Registerkarten gelöscht. Anschliessend erscheinen in den Spurregisterkarten die durch die aktiven Befehle vorgegebenen Meldungen, Kurven und Messwertanzeigen. Dabei werden die Titel der Registerkarten für die aktiven Spuren rot angezeigt. Zusätzlich erscheinen Befehlstyp und Befehlsname des aktiven Befehls im Fenstertitel des Unterfensters **Liveanzeige**.

Werden mit **[HOLD]** alle Spuren oder mit einem **SEND**-Befehl einzelne Spuren angehalten, so steht in diesen Spuren **Spur angehalten...**

Nach der Beendigung der Spur steht in allen Spuren mit Ausnahme der Hauptspur **Spur beendet**. In der Hauptspur wird nach Beendigung der Bestimmung je nach Ablauf der Bestimmung folgendes angezeigt:

Ablauf: regulär ohne Bemerkungen

Die Bestimmung wurde automatisch beendet, nachdem sie regulär und ohne Bemerkungen abgelaufen war.

Ablauf: regulär mit Bemerkungen

Die Bestimmung wurde automatisch beendet, nachdem sie regulär, aber mit Bemerkungen (siehe Informationsfenster) abgelaufen war.

Ablauf: Abbruch

Die Bestimmung oder das Konditionieren wurde manuell mit **[Stop]**, durch Stoppkriterien oder durch einen **SEND**-Befehl abgebrochen.

Ablauf: Abbruch durch Fehler

Die Bestimmung oder das Konditionieren wurde aufgrund eines Fehlers automatisch abgebrochen oder aufgrund eines Fehlers beim Starttest gar nicht gestartet.

3.7.3 Applikationsnotiz

Auf der Registerkarte **Applikationsnotiz** wird die im **START**-Befehl definierte Applikationsnotiz der geladenen Methode angezeigt. Diese Registerkarte wird standardmässig beim Laden der Methode im Unterfenster **Liveanzeige** geöffnet.

3.7.4 Eigenschaften

Mit dem Menüpunkt **Ansicht, Eigenschaften, Eigenschaften Liveanzeige #** oder dem kontextsensitiven Menüpunkt **Eigenschaften Liveanzeige #** im Unterfenster selber wird das Dialogfenster **Eigenschaften Liveanzeige #** geöffnet.

Auswahl des Befehlstyps

Befehlstyp

[DET], MET, SET, KFT, KFC, MEAS, MEAS T/Flow

Auswahl des Befehlstyps, für den die Eigenschaften in der Liveanzeige definiert werden sollen. Die pro Befehlstyp festgelegten Kurveneigenschaften werden dabei pro Liveanzeige Fenster und pro Client gespeichert.

Messwertanzeige

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden die gewünschten Messwerte im Unterfenster **Liveanzeige** angezeigt.

Messwert 1...3

[aus], Messwert, Zeit, Temperatur, Volumen (für DET)

[aus], Messwert, Zeit, Temperatur, Volumen (für MET)

[aus], Messwert, Zeit, Temperatur, Volumen, dV/dt (für SET)

[aus], Messwert, Zeit, Temperatur, Volumen, dV/dt (für KFT)
 [aus], Messwert, Zeit, Wasser, Drift, Ladung, Ugen, Igen (für KFC)
 [aus], Messwert, Zeit, Temperatur (für MEAS)
 [aus], Messwert, Zeit, Fluss (für MEAS T/Flow)
 Auswahl des Messwertes für die Messwertanzeige.

Kurvenanzeige

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, werden die gewünschten Kurven im Unterfenster **Liveanzeige** angezeigt.

x-Achse

[Volumen], Messwert, Zeit, Temperatur, ERC, Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für DET)
 [Volumen], Messwert, Zeit, Temperatur, dMW, Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für MET)
 [Zeit], Messwert, Temperatur, Volumen, dV/dt , Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für SET)
 [Zeit], Messwert, Temperatur, Volumen, dV/dt , Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für KFT)
 [Zeit], Messwert, Wasser, Drift, Ladung, Ugen, Igen, Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für KFC)
 [Zeit], Messwert, Temperatur, Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für MEAS)
 [Zeit], Messwert, Fluss, Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für MEAS T/Flow)
 Auswahl der Grösse, die auf der x-Achse dargestellt werden soll.

y1-Achse

[Messwert], Volumen, Zeit, Temperatur, ERC, Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für DET)
 [Messwert], Volumen, Zeit, Temperatur, dMW, Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für MET)
 [Volumen], Messwert, Temperatur, Zeit, dV/dt , Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für SET)
 [Volumen], Messwert, Temperatur, Zeit, dV/dt , Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für KFT)
 [Wasser], Messwert, Zeit, Drift, Ladung, Ugen, Igen, Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für KFC)
 [Messwert], Zeit, Temperatur, Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für MEAS)
 [Messwert], Zeit, Fluss, Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für MEAS T/Flow)
 Auswahl der Grösse, die auf der y1-Achse (linke y-Achse) dargestellt werden soll.

Farbe

Farbauswahl, [blau]

Auswahl der Kurvenfarbe für die Grösse, die auf der y1-Achse dargestellt wird.

y2-Achse

[aus], Messwert, Volumen, Zeit, Temperatur, ERC, Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für DET)
 [aus], Messwert, Volumen, Zeit, Temperatur, dMW, Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für MET)
 [aus], Messwert, Volumen, Temperatur, Zeit, dV/dt , Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für SET)
 [aus], Messwert, Volumen, Temperatur, Zeit, dV/dt , Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für KFT)
 [aus], Messwert, Zeit, Wasser, Drift, Ladung, Ugen, Igen, Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für KFC)
 [aus], Messwert, Zeit, Temperatur, Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für MEAS)
 [aus], Messwert, Zeit, Fluss, Berechnet 1...3, Extern 1...3 (für MEAS T/Flow)
 Auswahl der Grösse, die auf der y2-Achse (rechte y-Achse) dargestellt werden soll.

Farbe

Farbauswahl, [magenta]

Auswahl der Kurvenfarbe für die Grösse, die auf der y2-Achse dargestellt wird.

Messpunkte anzeigen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden neben der Kurve auch die einzelnen Messpunkte in Form von Kreuzchen angezeigt.

Gitter anzeigen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird ein Gitter angezeigt.

Hintergrund

Farbauswahl, [weiss]

Auswahl der Farbe für den Kurvenhintergrund.

3.8 Unterfenster Report

3.8.1 Allgemeines

Unterfenster Report

Im Unterfenster **Report** werden die Reports von Bestimmungen angezeigt. Das Unterfenster kann im Programmteil **Arbeitsplatz** bei der Definition des Layouts eingeschaltet und damit sichtbar gemacht werden. Es kann beliebig vergrößert und verkleinert und auch maximiert werden.

Registerkarten

Das Unterfenster **Report** besteht aus den folgenden 3 Registerkarten:

- **Aktueller Report**
Anzeige des letzten, von einem **REPORT**-Befehl erzeugten Reports.
- **Ausgewählter Report**
Anzeige des in der Reportübersicht ausgewählten Reports.
- **Reportübersicht**
Übersicht über die im Arbeitsplatz gespeicherten Reports.


3.8.2 Aktueller Report

Auf der Registerkarte **Aktueller Report** wird automatisch immer der aktuellste, von einem **REPORT**-Befehl im Methodenablauf erzeugte Report angezeigt. Inhalt und Format des Reports sind durch die im **REPORT**-Befehl ausgewählte Reportvorlage bestimmt.

3.8.3 Ausgewählter Report

Auf der Registerkarte **Ausgewählter Report** wird der in der Reportübersicht ausgewählte Report angezeigt. Inhalt und Format des Reports sind durch die im **REPORT**-Befehl ausgewählte Reportvorlage bestimmt.

3.8.4 Reportübersicht

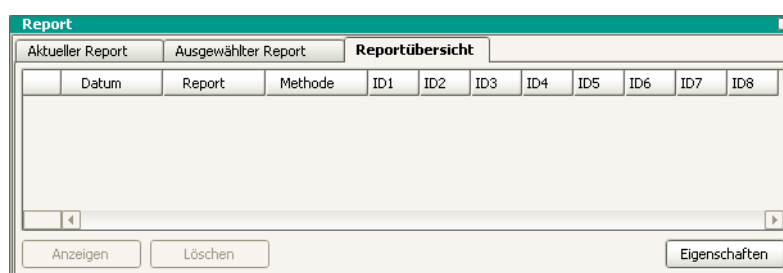

Auf der Registerkarte **Reportübersicht** werden alle im aktuell ausgewählten Arbeitsplatz gespeicherten Reports in einer Tabelle angezeigt, in der die Zeilen chronologisch aufsteigend geordnet sind. Beim Eintreffen neuer Reports wird die Tabelle automatisch aktualisiert. Die Tabelle enthält die folgenden Spalten, die mit der Maus verkleinert, vergrößert und verschoben werden können:

Datum

Zeitpunkt der Reporterstellung mit Datum, Zeit und Zeitzone (UTC ± ##).

Report

Befehlsname des **REPORT**-Befehls, der den Report erzeugt hat.

Methode

Methodenname.

ID1...ID8

Probenidentifikationen **ID1...ID8**.

Anzeigen

Der ausgewählte Report (bzw. der erste der ausgewählten Reports) wird auf der Registerkarte **Ausgewählter Report** angezeigt, die automatisch geöffnet wird.

Löschen

Die ausgewählten Reports werden in der Reportübersicht gelöscht.

Eigenschaften

Öffnen des Dialogfensters **Eigenschaften - Reportübersicht**.



Maximale Anzahl Reports

1 ... [20] ... 100

Maximale Anzahl Reports, die in der Reportübersichtstabelle gespeichert werden. Wird diese Anzahl überschritten, wird automatisch der älteste Report gelöscht.

Kapitel 4 Datenbank

4.1 Allgemeines

4.1.1 Allgemeines

Definition

Als **Datenbank** bezeichnet man in *tiamo* den Programmteil, in dem die in Datenbanken gespeicherten Bestimmungen angezeigt, verwaltet, ausgewertet, nachbearbeitet und ausgedruckt werden können.

Organisation

Bei **Local-Server-Systemen** (*tiamo light*, *tiamo full*) werden die Datenbanken auf den vom Rechner verwalteten Laufwerken gespeichert und sind nur für die an diesem Rechner angemeldeten Anwender mit entsprechenden Zugriffsrechten verfügbar.

Bei **Client-Server-Systemen** (*tiamo multi*) werden die Datenbanken auf den zentral vom Server verwalteten Laufwerken gespeichert und sind global im ganzen Client/Server-Verbund verfügbar, d.h. alle Anwender mit entsprechenden Zugriffsrechten können diese Datenbanken verwenden.

4.1.2 Oberfläche

Datenbanksymbol



Durch Klicken auf das Datenbanksymbol in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Datenbank** geöffnet, gleichzeitig wird das Datenbanksymbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des Symbols befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell geöffneten Datenbanken angezeigt wird (siehe Datenbankauswahl).

Elemente

Die Oberfläche des Programmteils **Datenbank** umfasst die folgenden Elemente:

- Datenbankspezifische Menüleiste.
- Datenbankspezifische Symbolleiste.
- Hauptfenster, in dem bis zu 5 Unterfenster angezeigt werden können.

4.1.3 Menüleiste

Die Menüleiste im Programmteil **Datenbank** umfasst folgende Hauptmenüpunkte:

- **Datei**
Datenbanken öffnen und schliessen, Datenbankverwaltung, Drucken.
- **Bearbeiten**
Ausgewählte Zeilen in der Bestimmungsübersicht in die Zwischenablage kopieren, alle Zeilen markieren.
- **Ansicht**
Layout ändern, Ansicht laden, Ansicht speichern, Eigenschaften der Unterfenster ändern.
- **Bestimmungen**
Bestimmungen suchen, filtern, unterschreiben, löschen; Kurven überlagern, Kalibrierkurven, Nachbearbeiten, etc..
- **Extras**
Manuelle Bedienung, Reportvorlagen, weitere Vorlagen.
- **Hilfe**
tiamo-Hilfe öffnen, Info zu *tiamo* anzeigen.

Menü Datei



Öffnen...

Datenbank öffnen.

Alle schliessen

Alle geöffneten Datenbanken schliessen.



Schliessen

Datenbank schliessen.



Datenbankverwaltung

Verwaltung der Bestimmungsdatenbanken.

Drucken/Bestimmungsübersicht...

Bestimmungsübersicht als PDF-Datei ausgeben.

Drucken/Report...

Report als PDF-Datei ausgeben.



Abmelden

Anwender abmelden.

Beenden

Programm beenden.

Menü Datei



Kopieren

Ausgewählte Zeilen in der Bestimmungsübersicht in Zwischenablage kopieren.

Alles auswählen

Alle Zeilen im aktuellen Satz an Bestimmungen in der Bestimmungsübersicht auswählen.

Menü Ansicht



Aktualisieren

Bestimmungsübersicht aktualisieren.



Layout ändern

Layout der geladenen Datenbankansicht ändern.



Ansicht laden

Laden einer gespeicherten Datenbankansicht.



Ansicht speichern

Speichern der aktuellen Datenbankansicht.



Nebeneinander

Datenbankfenster horizontal teilen und zwei Datenbanken nebeneinander anzeigen.



Untereinander

Datenbankfenster vertikal teilen und zwei Datenbanken untereinander anzeigen.



Teilung aufheben

Teilung des Datenbankfensters wieder aufheben.



Eigenschaften/Spaltenanzeige

Spaltenanzeige für Unterfenster Bestimmungsübersicht einstellen.

Eigenschaften/Eigenschaften Kurven 1...5

Eigenschaften für Unterfenster **Kurven 1...5** einstellen.

Eigenschaften/Eigenschaften Resultate

Eigenschaften für Unterfenster **Resultate** einstellen.

Symbolleiste

Anzeige der Symbolleiste ein-/ausschalten.

Menü Bestimmungen



Kommentar

Kommentar zur ausgewählten Bestimmung eingeben.



Suchen

Öffnen des Fensters **Suchen** für die Suche nach Bestimmungen.



Filter/Letzter Filter

Anwenden des zuletzt angewendeten Schnell- oder Spezialfilters.



Filter/Schnellfilter

Schnellfilterung der Datenbank mit dem Inhalt des ausgewählten Tabellenfeldes.



Filter/Spezialfilter...

Öffnen des Fensters **Spezialfilter** für die Definition von anwenderspezifischen Filtern.



Filter/Alle Statistikdatensätze

Anzeigen aller zusammengehörenden Statistikdatensätze zur fokussierten Bestimmung.



Filter/Filter entfernen

Entfernen des aktuellen Filters.



Unterschreiben/Unterschrift 1...

Ausgewählte Bestimmungen auf Stufe 1 unterschreiben.



Unterschreiben/Unterschrift 2...

Ausgewählte Bestimmungen auf Stufe 2 unterschreiben.

Unterschreiben/Unterschriften anzeigen...

Alle Unterschriften der fokussierten Bestimmung anzeigen.

Unterschreiben/Unterschriften 2 löschen...

Alle Unterschriften der Stufe 2 der fokussierten Bestimmung löschen.

Exportieren...

Ausgewählte Bestimmungen exportieren.

Importieren...

Ausgewählte Bestimmungen importieren.



Methode anzeigen...

Die für die fokussierte Bestimmung verwendete Methode anzeigen.



History anzeigen...

Alle Versionen für die fokussierte Bestimmung in der Bestimmungstabelle anzeigen.



Aktuell machen

Die in der History-Ansicht ausgewählte Version wieder zur aktuellen Version machen.



Kalibrierkurve anzeigen...

Kalibrierkurve für die fokussierte Bestimmung anzeigen.



Kontrollkarte...

Kontrollkarte und statistische Auswertung der ausgewählten Bestimmungen anzeigen.



Kurven überlagern...

Kurven der ausgewählten Bestimmungen überlagern.



Nachbearbeiten...

Ausgewählte Bestimmungen nachbearbeiten.



Löschen

Ausgewählte Bestimmungen löschen.

Menü Extras



Manuelle Bedienung

Dialogfenster für die manuelle Bedienung von Geräten öffnen.

Reportvorlagen/Neu/Formularreport

Fenster **Reportvorlage** mit leerem Formularreport öffnen.

Reportvorlagen/Neu/Tabellarischer Report

Fenster **Reportvorlage** mit leerem tabellarischen Report öffnen.



Reportvorlagen/Öffnen...

Reportvorlage zum Bearbeiten öffnen.

Reportvorlagen/Verwalten...

Reportvorlagen verwalten.

Vorlagen/Vorlagen für Kontrollkarte...

Vorlagen für Kontrollkarten verwalten.

Vorlagen/Vorlagen für Kurvenüberlagerung...

Vorlagen für Kurvenüberlagerung verwalten.

Vorlagen/Exportvorlagen...

Exportvorlagen verwalten.

Menü Hilfe



tiamo Hilfe

tiamo-Hilfe öffnen.

Info

Informationen zum Programm und zur Installation anzeigen.

4.1.4 Symbolleiste



Öffnen...

Datenbank öffnen.



Schliessen

Datenbank schliessen.



Datenbankverwaltung

Verwaltung der Bestimmungsdatenbanken.



Abmelden

Anwender abmelden.



Kopieren

Ausgewählte Zeilen in der Bestimmungsübersicht in Zwischenablage kopieren.



Aktualisieren

Bestimmungsübersicht aktualisieren.



Layout ändern

Layout der geladenen Konfigurationsansicht ändern.



Ansicht laden

Laden einer gespeicherten Konfigurationsansicht.



Ansicht speichern

Speichern der aktuellen Konfigurationsansicht.



Manuelle Bedienung

Dialogfenster für die manuelle Bedienung von Geräten öffnen.



Nebeneinander

Datenbankfenster horizontal teilen und zwei Datenbanken nebeneinander anzeigen.



Untereinander

Datenbankfenster vertikal teilen und zwei Datenbanken untereinander anzeigen.



Teilung aufheben

Teilung des Datenbankfensters wieder aufheben.



Kommentar

Kommentar zur ausgewählten Bestimmung eingeben.



Suchen

Öffnen des Fensters **Suchen** für die Suche nach Bestimmungen.



Filter/Letzter Filter

Anwenden des zuletzt angewendeten Schnell- oder Spezialfilters.



Filter/Schnellfilter

Schnellfilterung der Datenbank mit dem Inhalt des ausgewählten Tabellenfeldes.

-  **Filter/Spezialfilter...**
Öffnen des Fensters **Spezialfilter** für die Definition von anwenderspezifischen Filtern.
-  **Filter/Alle Statistikdatensätze**
Anzeigen aller zusammengehörenden Statistikdatensätze zur fokussierten Bestimmung.
-  **Filter/Filter entfernen**
Entfernen des aktuellen Filters.
-  **Unterschreiben/Unterschrift 1...**
Ausgewählte Bestimmungen auf Stufe 1 unterschreiben.
-  **Unterschreiben/Unterschrift 2...**
Ausgewählte Bestimmungen auf Stufe 2 unterschreiben.
-  **Methode anzeigen...**
Die für die fokussierte Bestimmung verwendete Methode anzeigen.
-  **History anzeigen...**
Alle Versionen für die fokussierte Bestimmung in der Bestimmungstabelle anzeigen.
-  **Aktuell machen**
Die in der History-Ansicht ausgewählte Version wieder zur aktuellen Version machen.
-  **Kalibrierkurve anzeigen...**
Kalibrierkurve für die fokussierte Bestimmung anzeigen.
-  **Kontrollkarte...**
Kontrollkarte und statistische Auswertung der ausgewählten Bestimmungen anzeigen.
-  **Kurven überlagern...**
Kurven der ausgewählten Bestimmungen überlagern.
-  **Nachbearbeiten...**
Ausgewählte Bestimmungen nachbearbeiten.
-  **Löschen**
Ausgewählte Bestimmungen löschen.
-  **Reportvorlagen/Öffnen...**
Reportvorlage zum Bearbeiten öffnen.
-  **tiamo Hilfe**
tiamo-Hilfe öffnen.

4.1.5 Unterfenster

Auswahl

Im Hauptfenster können die folgenden 6 Unterfenster angezeigt werden:

- **Bestimmungsübersicht**
Übersicht über die in der Datenbank gespeicherten Bestimmungen. Dieses Unterfenster wird immer angezeigt.
- **Informationen**
Anzeige der Informationen zur fokussierten Bestimmung.
- **Resultate**
Anzeige der Resultate zur fokussierten Bestimmung.

- **Kurven 1...5**
Anzeige von Kurven zur fokussierten Bestimmung.

Darstellung

Die Unterfenster können durch Ziehen des Trennbalkens zwischen den Fenstern beliebig vergrößert oder verkleinert werden.

Durch Klick auf die Schaltfläche  oben rechts können die Unterfenster maximiert werden, so dass nur noch 1 Unterfenster im Hauptfenster angezeigt wird. Durch erneutes Drücken der Schaltfläche  im maximierten Unterfenster wird wieder zur ursprünglichen Ansicht aller Unterfenster gewechselt.

4.1.6 Funktionen

Im Programmteil **Datenbank** können folgende Funktionen ausgeführt werden:

Ansichten

- Layout der Datenbankansicht definieren
- Datenbankansicht laden
- Datenbankansicht speichern
- Datenbankansicht umbenennen
- Datenbankansicht löschen

Datenbankverwaltung

- Neue Datenbank erstellen
- Datenbank umbenennen
- Datenbankeneigenschaften bearbeiten
- Datenbank sichern
- Datenbank wiederherstellen
- Datenbank löschen

Bestimmungen

- Funktionsübersicht

Vorlagen

- Reportvorlagen bearbeiten
- Vorlagen für Kontrollkarten bearbeiten
- Vorlagen für Kurvenüberlagerung bearbeiten
- Exportvorlagen bearbeiten

4.1.7 Datenbankansichten

Definition

Als **Datenbankansicht** wird der Inhalt und die Gestaltung des Hauptfensters im Programmteil **Datenbank** bezeichnet. Zur Datenbankansicht gehören folgende Elemente:

- Anzahl, Anordnung, Reihenfolge und Grösse der Unterfenster.
- Darstellung innerhalb der einzelnen Unterfenster, d.h. Spaltenreihenfolge, Spaltenbreite, Sortierung und Filter.

Funktionen

Für Datenbankansichten sind folgende Funktionen möglich:

- **Layout ändern**
Anzahl, Anordnung und Reihenfolge der Unterfenster für die aktuelle Datenbankansicht definieren.
- **Ansicht speichern**
Aktuelle Datenbankansicht speichern.
- **Ansicht laden**
Gespeicherte Datenbankansicht laden.
- **Ansicht umbenennen**
Gespeicherte Datenbankansicht umbenennen.
- **Ansicht löschen**
Gespeicherte Datenbankansicht löschen.

Automatisch speichern

Ist bei den Optionen auf der Registerkarte **Speichern** der Punkt **Einstellungen für Datenbank** unter **Beim Beenden speichern** eingeschaltet, wird die aktuelle Datenbankansicht beim Schliessen von *tiamo* automatisch gespeichert.

Automatisch laden

Standardmässig wird die beim Schliessen von *tiamo* gespeicherte Datenbankansicht beim erneuten Öffnen von *tiamo* automatisch wieder geladen. Als Alternative kann für jede Anwendergruppe eine Standard-Datenbankansicht definiert werden, die beim ersten Öffnen des Programmteils **Datenbank** automatisch geladen wird.

Hinweis


Beim allerersten Programmstart wird standardmässig eine Datenbankansicht mit den 4 Unterfenstern **Bestimmungsübersicht**, **Kurven 1**, **Informationen** und **Resultate** geöffnet.

Export/Import

Datenbankansichten können auch exportiert und importiert werden. Damit können Ansichten zwischen verschiedenen Client/Server-Systemen ausgetauscht werden.

Layout ändern

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht, Layout ändern** wird das Dialogfenster **Layout ändern** geöffnet.

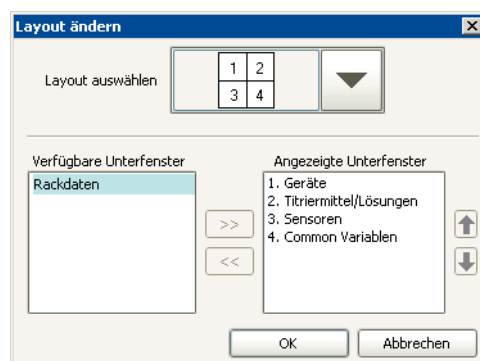

Layout auswählen

Auswahl der möglichen Kombinationen

Auswahl eines grafischen Symbols für die Anzahl und Anordnung der Unterfenster.

Verfügbare Unterfenster

Auswahl der Unterfenster

Anzeige der noch verfügbaren Unterfenster für die Anzeige in der Ansicht.

Angezeigte Unterfenster

Unterfenster

Anzeige der in der Ansicht angezeigten Unterfenster.



Hinzufügen des ausgewählten Unterfensters zur Ansicht.



Entfernen des ausgewählten Unterfensters aus der Ansicht.




Verschieben des ausgewählten Unterfensters nach oben (Reihenfolge ändern).



Verschieben des ausgewählten Unterfensters nach unten (Reihenfolge ändern).

Ansicht speichern

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht, Ansicht speichern** wird das Dialogfenster **Ansicht speichern** geöffnet.

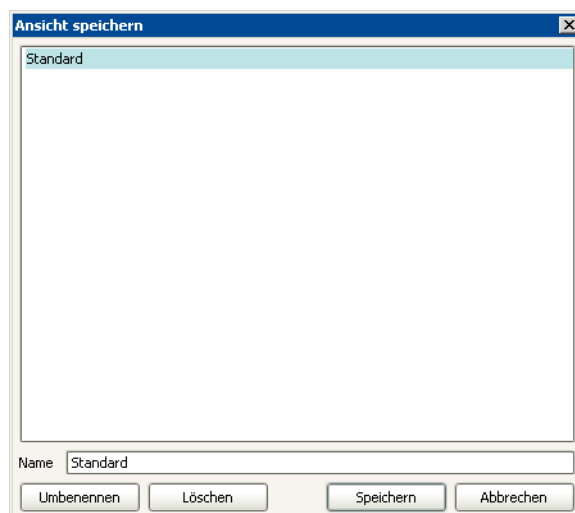

Name

Name, unter dem die Ansicht gespeichert werden soll.



Ausgewählte Ansicht umbenennen.




Ausgewählte Ansicht löschen.



Ansicht unter dem angegebenen Namen speichern. Die gespeicherten Ansichten sind bei Client/Server-Systemen global gültig und verfügbar.

Ansicht laden

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht, Ansicht laden** wird das Dialogfenster **Ansicht laden** geöffnet.

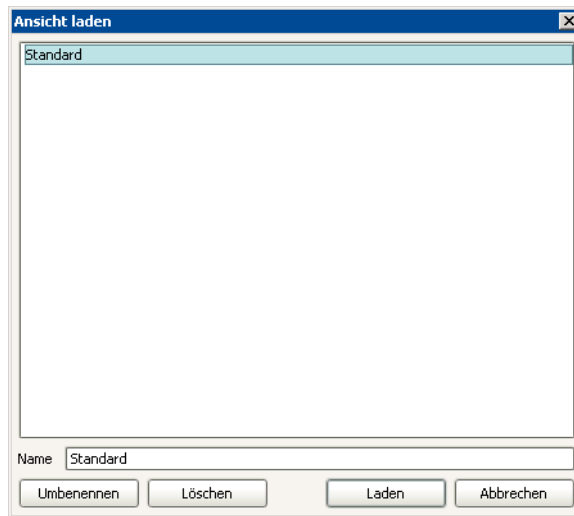

Name

Name der Ansicht, die geladen werden soll.

Umbenennen

Ausgewählte Ansicht umbenennen.

Löschen


Ausgewählte Ansicht löschen.

Laden

Ausgewählte Ansicht laden.

Ansicht umbenennen

Um eine Ansicht umzubenennen, muss entweder das Dialogfenster **Ansicht laden** oder **Ansicht speichern** geöffnet und die Schaltfläche  gedrückt werden. Anschliessend öffnet sich das Fenster **Ansicht umbenennen**.

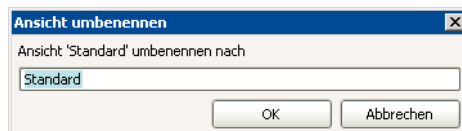

Ansicht umbenennen nach

50 Zeichen, ['Alter Name']

Eingabe eines neuen Namens für die Ansicht.


Ansicht löschen

Um eine Ansicht zu löschen, muss entweder das Dialogfenster **Ansicht laden** oder **Ansicht speichern** geöffnet und die Schaltfläche  gedrückt werden. Anschliessend muss der Löschvorgang bestätigt werden.

4.2 Datenbanken öffnen/anzeigen

4.2.1 Datenbank öffnen

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei, Öffnen...** wird das Fenster **Datenbank öffnen** geöffnet, in dem eine der auf dem Server (oder auf dem Local Server) verfügbaren Datenbanken ausgewählt werden kann, die geöffnet werden soll.

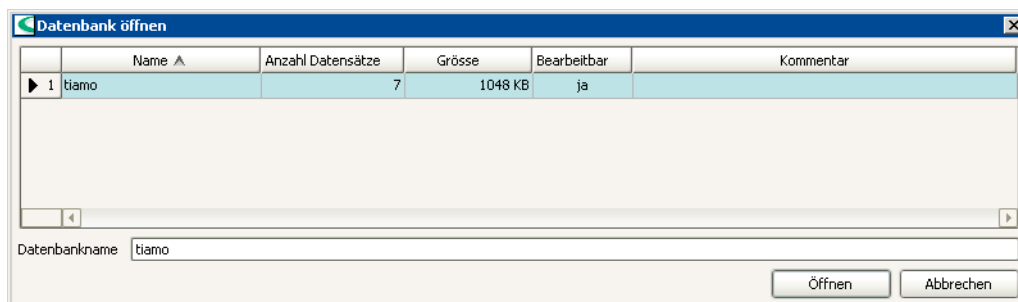

Datenbanktabelle

Die Datenbanktabelle enthält Informationen zu allen Bestimmungsdatenbanken. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Anzahl Datensätze**, **Grösse**, **Letzte Sicherung**, **Nächste Sicherung**, **Kommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Datenbank.

Anzahl Datensätze

Anzeige der Anzahl Datensätze in der Datenbank.

Grösse

Anzeige der Grösse der Datenbank in KB.

Bearbeitbar

Anzeige, ob die Datenbank für den angemeldeten Anwender bearbeitbar ist oder nicht.

Kommentar

Anzeige der Bemerkungen zur Datenbank.

Datenbank öffnen

Datenbankname

50 Zeichen

Name der Datenbank, die geöffnet werden soll. Wird eine der Datenbanken in der Tabelle ausgewählt, wird der Datenbankname automatisch in diesem Feld eingetragen. Er kann aber auch manuell eingegeben werden.




Öffnet die ausgewählte Datenbank und zeigt deren Datensätze in der Bestimmungsübersicht an. Der Datenbankname wird in der Titelzeile des Programms angezeigt, die Anzahl geöffneter Datenbanken in der linken oberen Ecke des Datenbanksymbols.

Hinweis

Es können maximal 4 Datenbanken geöffnet, aber nur 2 gleichzeitig angezeigt werden. Datenbanken, die beim Beenden des Programms geöffnet sind, werden beim erneuten Programmstart automatisch geöffnet.

4.2.2 Auswahl der Datenbank im Datenbanksymbol

In der linken oberen Ecke des Datenbanksymbols wird die Anzahl geöffneter Datenbanken angezeigt. Sind 2 oder mehr Datenbanken geöffnet, können die beiden Datenbanken, die im Hauptfenster nebeneinander oder untereinander angezeigt werden können, mit Hilfe des Datenbanksymbols ausgewählt werden.

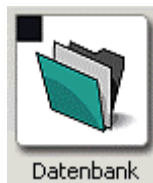


Es ist keine Datenbank geöffnet. Im Hauptfenster wird **Keine Datenbank geladen** angezeigt.



Eine Datenbank ist geöffnet und wird im Hauptfenster angezeigt.



Zwei Datenbanken sind geöffnet. Normalerweise wird nur eine Datenbank im Hauptfenster angezeigt, es können aber auch zwei Datenbanken nebeneinander oder untereinander angezeigt werden.

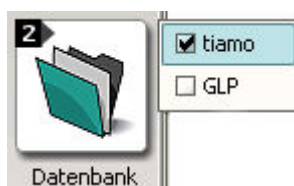

Ein Klick mit der linken oder rechten Maustaste auf das Datenbanksymbol öffnet ein Menü, in dem die Namen aller geöffneten Datenbanken angezeigt werden. Die im Hauptfenster angezeigten Datenbanken werden dabei mit einem Häkchen markiert. Mit einem Klick auf die gewünschte Datenbank wird diese anstelle der zuvor ausgewählten Datenbank im Hauptfenster angezeigt.

4.2.3 Einzelne Datenbank anzeigen

Standardmässig wird immer die zuletzt geöffnete Datenbank einzeln im Hauptfenster angezeigt. Ist die Anzeige zweier Datenbanken eingeschaltet, kann mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht, Teilung aufheben** wieder auf die Anzeige nur einer Datenbank umgeschaltet werden.

4.2.4 Datenbanken nebeneinander anzeigen

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht, Nebeneinander** werden zwei Datenbanken nebeneinander im Hauptfenster angezeigt.

4.2.5 Datenbanken untereinander anzeigen

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht, Untereinander** werden zwei Datenbanken untereinander im Hauptfenster angezeigt.

4.2.6 Datenbank schliessen

Einzelne Datenbank schliessen

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei, Schliessen** wird die fokussierte Datenbank geschlossen.

Alle Datenbanken schliessen

Mit dem Menüpunkt **Datei, Alle schliessen** werden alle geöffneten Datenbanken geschlossen.

4.3 Datenbanken verwalten

4.3.1 Datenbanken verwalten

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei, Datenbankverwaltung...** wird das Fenster **Datenbankverwaltung** geöffnet, in dem ein Anwender mit entsprechender Zugriffsberechtigung Datenbanken verwalten kann.



Datenbanktabelle

Die Datenbanktabelle enthält Informationen zu allen Bestimmungsdatenbanken. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Anzahl Datensätze**, **Grösse**, **Letzte Sicherung**, **Nächste Sicherung**, **Kommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Datenbank.

Anzahl Datensätze

Anzeige der Anzahl Datensätze in der Datenbank.

Grösse

Anzeige der Grösse der Datenbank in KB.

Letzte Sicherung

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Sicherung der Datenbank.

Nächste Sicherung

Anzeige von Datum und der Zeit, an dem der nächste Backup durchgeführt werden soll.

Kommentar

Anzeige der Bemerkungen zur Datenbank.

Fenstermenüs und Funktionen



Das Menü **Bearbeiten** unterhalb der Datenbanktabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu...

Neue Datenbank erstellen.

Löschen

Ausgewählte Datenbank löschen.

Umbenennen...

Ausgewählte Datenbank umbenennen.



Öffnen des Fensters **Eigenschaften - Datenbank** zum Bearbeiten der in der Tabelle ausgewählten Datenbank.



Öffnen des Fensters **Sichern der Datenbank** zum Sichern der in der Tabelle ausgewählten Datenbank.

Wiederherstellen


Öffnen des Fensters **Wiederherstellen von Datenbanken** zum Wiederherstellen von gesicherten Datenbanken.

Schliessen

Schliessen des Fensters **Datenbankverwaltung**.

4.3.2 Datenbank neu erstellen

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Neu...** im Dialogfenster **Datenbankverwaltung** wird das Fenster **Neue Datenbank** geöffnet, in dem ein Name für die neue Datenbank eingegeben werden muss.

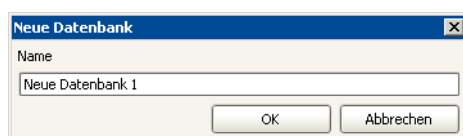

Name

50 Zeichen, [Neue Datenbank #]
Name der neuen Datenbank.


Hinweis

Der Datenbankname muss im ganzen Client/Serversystem eindeutig sein.

Mit **[OK]** wird das Fenster **Eigenschaften - Datenbank** zum Bearbeiten der Datenbankeigenschaften geöffnet.

4.3.3 Datenbank umbenennen

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Umbenennen...** im Fenster **Datenbankverwaltung** öffnet sich das Fenster **Datenbank umbenennen** zum Umbenennen der ausgewählten Datenbank.

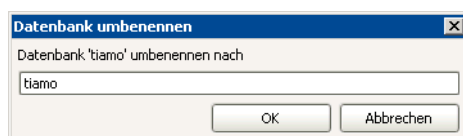

Datenbank 'Name' umbenennen nach

50 Zeichen

Eingabe des neuen Datenbanknamens.

Hinweis

Der Datenbankname muss im ganzen Client/Serversystem eindeutig sein.

4.3.4 Datenbank löschen

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Löschen** im Fenster **Datenbankverwaltung** wird die ausgewählte Datenbank gelöscht.

Hinweis

Geöffnete Datenbanken können nicht gelöscht werden.

4.3.5 Datenbankeigenschaften

Die Eigenschaften für eine Datenbank werden auf den folgenden 4 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein**
Allgemeine Informationen zur Datenbank.
- **Zugriffsrechte**
Zugriffsrechte für Anwendergruppen auf die Datenbank.
- **Sicherung**
Definition der Sicherungsüberwachung und automatischen Sicherung.
- **Überwachung**
Definition der Datenbanküberwachung.

Allgemein

Allgemeine Informationen zur Datenbank.

Kommentar

250 Zeichen

Frei definierbare Bemerkungen zur Datenbank.

Anzahl Datensätze

Anzeige der Anzahl Datensätze in der Datenbank.

Grösse

Anzeige der Grösse der Datenbank in KB.

Erstellt

Anzeige von Datum und Zeit der Erstellung der Datenbank.

Erstellt durch

Anzeige des Anwenders (Anwender), welcher die Datenbank erstellt hat.

Geändert

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Änderung der Datenbankeigenschaften.

Geändert durch

Anzeige des Anwenders (Kurzname), der die Änderungen vorgenommen hat.

Zugriffsrechte

Zugriffsrechte für Anwendergruppen auf die Datenbank.

Anwendergruppe	Lesen	Bearbeiten
Administratoren	☒	☒
Anwender	☒	☐

Anwendergruppe

Anzeige der in der Anwenderverwaltung definierten Anwendergruppen.

Lesen

[ein], aus

Ein-/ausschalten der Berechtigung für das Öffnen der Datenbank. Die Datenbank kann nur angezeigt, aber nicht verändert werden (keine Datensätze löschen, kein Nachbearbeiten).

Bearbeiten

ein, [aus]

Ein-/Ausschalten der Berechtigung für das Bearbeiten der Datenbank. Datensätze können geändert und gelöscht werden.

Hinweis

Wird die Berechtigung zum Bearbeiten eingeschaltet, wird automatisch auch die Leseberechtigung eingeschaltet. Wird die Leseberechtigung ausgeschaltet, wird automatisch auch die Berechtigung zum Bearbeiten ausgeschaltet.

Sicherung

Definition der Sicherungsüberwachung und automatischen Sicherung.

Sicherung überwachen

ein, [aus]

Ein-/Ausschalten der Sicherungsüberwachung für die ausgewählte Datenbank. Ist die Option eingeschaltet, so wird das Feld **Nächste Sicherung** in der Datenbanktabelle beim Ablauf des Intervalls **rot** markiert.

Letzte Sicherung

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Sicherung der Datenbank.

Intervall

[1] ... 999; Tage, Wochen, [Monate], Jahre

Eingabe des Intervalls für die Sicherungs-Überwachung. Bei jeder automatisch oder manuell ausgelösten Sicherung wird das hier eingegebene Intervall automatisch zu **Letzte Sicherung** addiert und das Feld **Nächste Sicherung** automatisch angepasst.

Nächste Sicherung

Datumsauswahl, [Letzte Sicherung + 1 Monat]

Datum, an dem die nächste Sicherung erfolgen muss. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden.

Sicherung automatisch starten

ein, [aus]

Automatischer Start des Backups für die Datenbank in das definierte **Sicherungsverzeichnis**.


Sicherungsverzeichnis

Auswahl der Sicherungsverzeichnisse, [Standardsicherungsverzeichnis]

Auswahl eines in der Programmadministration vordefinierten Verzeichnisses für die automatische Sicherung.

Überwachung

Definition der Datenbanküberwachung.

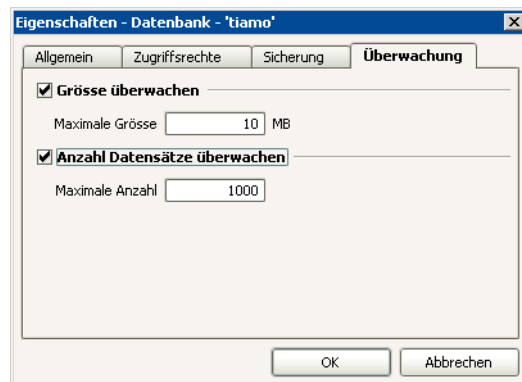

Grösse überwachen

ein, [aus]

Ein-/Ausschalten der Grössenüberwachung für die ausgewählte Datenbank. Ist diese Option eingeschaltet, so wird das Feld **Grösse** in der Datenbanktabelle beim Überschreiten des Grenzwertes **rot** markiert. Gleichzeitig erscheint beim Öffnen der Datenbank eine entsprechende Meldung.

Maximale Grösse

1 ... [10] ... 2147483647 MB

Maximal zulässige Grösse für die Datenbank in MB.

Anzahl Datensätze überwachen

ein, [aus]

Ein-/Ausschalten der Überwachung der Anzahl Datensätze für die ausgewählte Datenbank. Ist diese Option eingeschaltet, so wird das Feld **Anzahl** in der Datenbanktabelle beim Überschreiten des Grenzwertes rot markiert. Gleichzeitig erscheint beim Öffnen der Datenbank eine entsprechende Meldung.

Default: aus


Maximale Anzahl

1 ... [1000] ... 2147483647

Maximal zulässige Anzahl Datensätze für die Datenbank.

4.3.6 Datenbank manuell sichern

Mit **[Sichern]** im Fenster **Datenbankverwaltung** wird das Dialogfenster **Sichern der Datenbank** geöffnet:

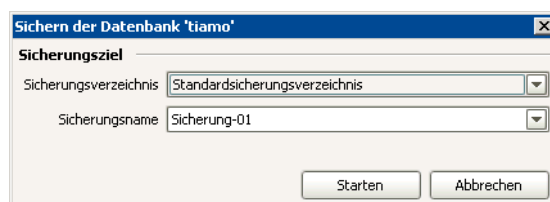

Sicherungsziel

Sicherungsverzeichnis

Auswahl der Sicherungsverzeichnisse, [Standardsicherungsverzeichnis]

Auswahl eines in der Programmadministration vordefinierten Verzeichnisses für die Sicherung.

Sicherungsname

50 Zeichen, [Sicherung-##]

Auswahl eines bereits vorhandenen oder Eingabe eines neuen Namens für die Sicherungsdatei. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei ausgewählt, wird diese überschrieben.

Hinweis

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte im **Sicherungsname** das Datum der Sicherung hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.



Manuelle Sicherung der Datenbank starten.

4.3.7 Datenbank wiederherstellen

Mit **[Wiederherstellen]** im Fenster **Datenbankverwaltung** wird das Dialogfenster **Wiederherstellen von Datenbanken** geöffnet:



Sicherungsverzeichnis

Auswahl der Sicherungsverzeichnisse, [Standardsicherungsverzeichnis]

Auswahl eines in der Programmadministration vordefinierten Verzeichnisses, in dem sich die gesicherten Datenbanken befinden.

Sicherungsname

Auswahl der Sicherungsdateien

Auswahl einer Sicherungsdatei.

Sicherungsdatum

Anzeige des Zeitpunkts der Sicherung der Datenbank. Befindet sich die Sicherungsdatei auf einem Netzlaufwerk, ist diese Information nicht verfügbar.

Datenbankname

Anzeige des Namens der Datenbank. Befindet sich die Sicherungsdatei auf einem Netzlaufwerk, ist diese Information nicht verfügbar.

Anzahl Datensätze

Anzeige der Anzahl Datensätze in der Datenbank. Befindet sich die Sicherungsdatei auf einem Netzlaufwerk, ist diese Information nicht verfügbar.

Grösse

Anzeige der Grösse der Datenbank in KB.

Speichern unter

50 Zeichen, [Neue Datenbank ##]

Name, unter dem die Datenbank wiederhergestellt werden soll.

Starten

Wiederherstellung der Datenbank starten. Nach dem Start erscheint ein Fortschrittsbalken im Fenster. Ist die Sicherung abgeschlossen, wird das Dialogfenster automatisch geschlossen.

Hinweis

Bestehende Datenbanken können nicht überschrieben werden, d.h. sie müssen zuerst gelöscht werden, damit die Datenbank unter dem alten Namen wiederhergestellt werden kann.

4.4 Reportvorlagen

4.4.1 Reportvorlage neu erstellen

Neuer Formularreport

Mit dem Menüpunkt **Extras, Reportvorlagen, Neu, Formularreport** wird das Programmfenster **Reportvorlage - Neuer Formularreport** mit einer leeren Reportvorlage geöffnet, die anschliessend bearbeitet werden kann.

Beim **Formularreport** umfasst der Reportbereich immer die ganze Fläche zwischen Kopfzeile und Fusszeile. Pro Bestimmung wird also immer mindestens eine Seite ausgegeben.


Neuer tabellarischer Report

Mit dem Menüpunkt **Extras, Reportvorlagen, Neu, Tabellarischer Report** wird das Programmfenster **Reportvorlage - Neuer tabellarischer Report** mit einer leeren Reportvorlage geöffnet, die anschliessend bearbeitet werden kann.

Beim **tabellarischen Report** ist der Reportbereich mit der Maus einstellbar. Pro Datensatz wird je ein solcher Reportbereich mit Daten gefüllt und auf der Seite aneinandergereiht. So können tabellarische Reports von mehreren Bestimmungen erstellt werden.

4.4.2 Reportvorlage öffnen

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Extras, Reportvorlagen, Öffnen...** wird das Fenster **Reportvorlage öffnen** geöffnet, in dem eine der global verfügbaren Reportvorlagen ausgewählt und geöffnet werden kann.

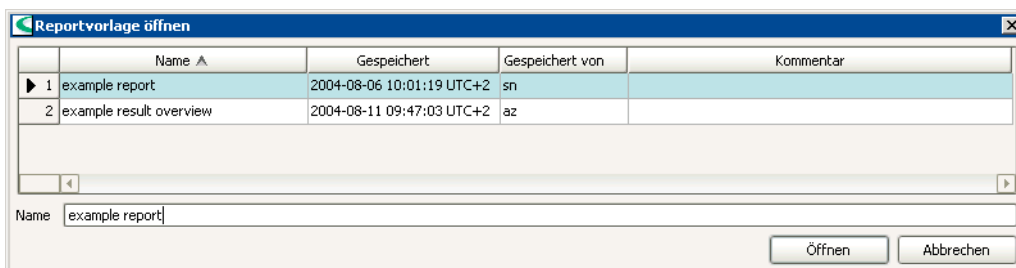

Liste der Reportvorlagen

Die Liste der Reportvorlagen enthält Informationen zu allen gespeicherten Reportvorlagen. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Gespeichert**, **Gespeichert von**, **Kommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Reportvorlage.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Reportvorlage.

Gespeichert von

Kurzname des Anwenders, welcher die Reportvorlage gespeichert hat.

Kommentar

Kommentar zur Reportvorlage.

Reportvorlage öffnen

Name

50 Zeichen

Name der Reportvorlage, die geöffnet werden soll. Wird eine der Reportvorlagen in der Tabelle ausgewählt, wird der Name automatisch in diesem Feld eingetragen. Er kann aber auch manuell eingegeben werden.

Öffnen

Öffnet das Programmfenster **Reportvorlage - 'Name'**, in dem die ausgewählte Reportvorlage angezeigt wird und bearbeitet werden kann.

4.4.3 Reportvorlagen bearbeiten


Allgemeines

In Reportvorlagen wird definiert, welche Bestimmungsdaten und welche weiteren Elemente (z.B. Textfelder, Bilder, Grafikelemente) in einem Report ausgegeben werden sollen. Die Vorlagen können in einem eigenen Programmfenster erstellt bzw. bearbeitet und unter einem eindeutigen Namen global gespeichert werden. Sie werden für die automatische Ausgabe von Reports in Bestimmungen mit dem **REPORT**-Befehl oder für die manuelle Reportausgabe aus der Datenbank verwendet.

Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Typen von Reportvorlagen:

- **Formularreport**
Beim Formularreport umfasst der Reportbereich immer die ganze Fläche zwischen Kopfzeile und Fusszeile. Pro Bestimmung wird also immer mindestens eine Seite ausgegeben.
- **Tabellarischer Report**
Beim tabellarischen Report ist der Reportbereich mit der Maus einstellbar. Pro Datensatz wird je ein solcher Reportbereich mit Daten gefüllt und auf der Seite aneinandergereiht. So können tabellarische Reports von mehreren Bestimmungen erstellt werden.

Oberfläche

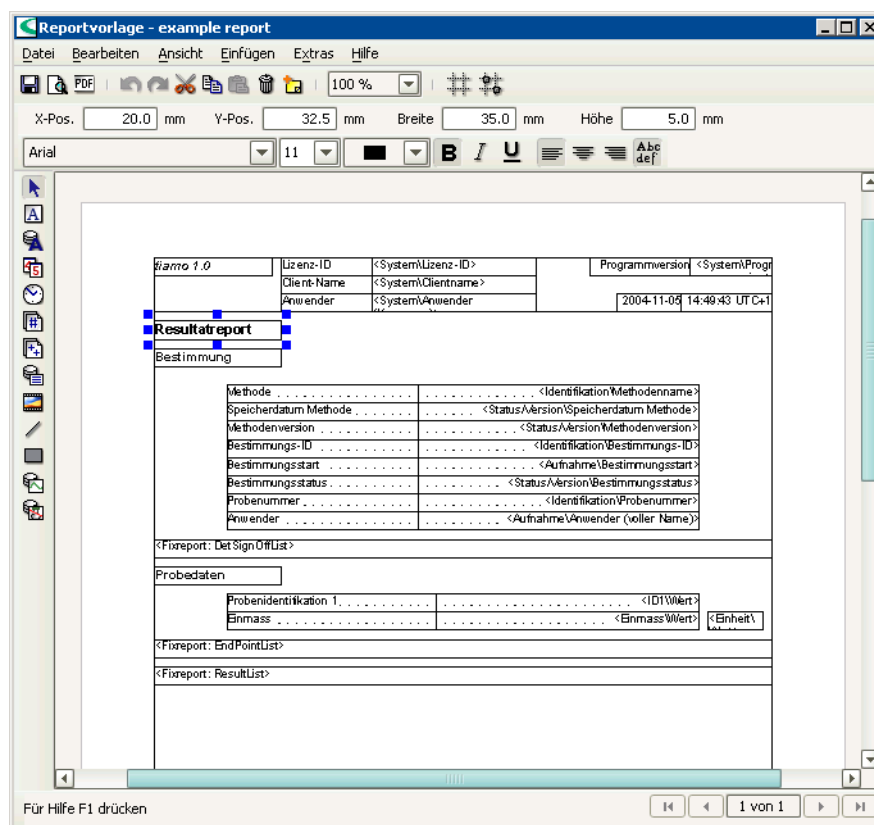

Elemente

Die Oberfläche des Programmfensters **Reportvorlage** umfasst die folgenden Elemente:

- Menüleiste
- Allgemeine Symbolleiste
- Bausteinspezifische Symbolleiste
- Bausteinleiste
- Hauptfenster mit Kopfzeile, Reportbereich und Fusszeile

Menüleiste

Die Menüleiste im Programmfenster **Reportvorlage** umfasst folgende Hauptmenüpunkte:

- **Datei**
Reportvorlagen speichern, Seite einrichten, Seitenansicht, Fenster schliessen.
- **Bearbeiten**
Rückgängig machen, Wiederherstellen, Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Löschen, Kommentar eingeben.
- **Ansicht**
Ansicht aktualisieren, Seitennavigation.
- **Einfügen**
Seiten einfügen.
- **Extras**
Optionen.

- **Hilfe**
tiamo-Hilfe öffnen.

Menü Datei



Speichern

Geöffnete Reportvorlage speichern.

Speichern unter

Geöffnete Reportvorlage unter einem neuen Namen speichern.

Seite einrichten

Seiteneinstellungen für Reportvorlage einrichten.



Seitenansicht

Seitenvorschau der Reportvorlage mit den Daten der ausgewählten Bestimmung.



Drucken (PDF)

Reportvorlage mit den Daten der ausgewählten Bestimmung als PDF-Datei ausgeben.

Schliessen

Programmfenster **Reportvorlage** schliessen.

Menü Datei



Rückgängig machen

Letzte Aktion rückgängig machen.



Wiederherstellen

Rückgängig gemachte Aktion wieder herstellen.



Ausschneiden

Markierte Elemente ausschneiden und in Zwischenablage kopieren.



Kopieren

Ausgewählte Elemente in Zwischenablage kopieren.



Einfügen

Markierte Elemente aus Zwischenablage einfügen.



Löschen

Markierte Elemente löschen.



Kommentar

Kommentar zu Reportvorlage eingeben.

Menü Ansicht

Aktualisieren

Ansicht aktualisieren.

Erste Seite

Erste Seite der Reportvorlage anzeigen.

Vorhergehende Seite

Vorhergehende Seite der Reportvorlage anzeigen.

Nächste Seite

Nächste Seite der Reportvorlage anzeigen.

Letzte Seite

Letzte Seite der Reportvorlage anzeigen.

Menü Einfügen

Seite davor

Neue Seite vor der angezeigten Seite einfügen.

Seite danach

Neue Seite nach der angezeigten Seite einfügen.

Menü Extras

Optionen

Optionen für Reportvorlage einstellen.

Menü Hilfe



tiamo Hilfe

tiamo-Hilfe öffnen.

Allgemeine Symbolleiste



Speichern

Geöffnete Reportvorlage speichern.



Seitenansicht

Seitenvorschau der Reportvorlage mit den Daten der ausgewählten Bestimmung.



Drucken (PDF)...

Reportvorlage mit den Daten der ausgewählten Bestimmung als PDF-Datei ausgeben.



Rückgängig machen

Letzte Aktion rückgängig machen.



Wiederherstellen

Rückgängig gemachte Aktion wieder herstellen.



Ausschneiden

Markierte Elemente ausschneiden und in Zwischenablage kopieren.



Kopieren

Ausgewählte Elemente in Zwischenablage kopieren.



Einfügen

Markierte Elemente aus Zwischenablage einfügen.



Löschen

Markierte Elemente löschen.



Kommentar eingeben



Reportvorlage zoomen

Auswahl der Zoomstufe.



Gitter

Anzeige des Gitters ein-/ausschalten.



Einschnappen an Gitter

Einschnappen an Gitter ein-/ausschalten.

Bausteinspezifische Symbolleiste

Unterhalb der allgemeinen Symbolleiste werden je nach ausgewähltem Baustein in der Reportvorlage weitere Symbole und Eingabefelder angezeigt, mit denen die Eigenschaften dieser Bausteine direkt editiert werden können (Einzelheiten siehe Bausteine).

Bausteinleiste



Bausteine auswählen

Ist diese Option eingeschaltet, können Bausteine in der Reportvorlage ausgewählt, verkleinert/vergrößert und verschoben werden.



Textfeld

Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage Textfelder eingefügt werden.



Datenfeld

Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage Datenfelder eingefügt werden.



Datumsfeld

Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage Datumsfelder eingefügt werden, in denen das aktuelle Datum eingetragen wird.



Zeitfeld

Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage Zeitfelder eingefügt werden, in denen die aktuelle Zeit eingetragen wird.



Seitenzahl

Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage Felder eingefügt werden, in denen die Seitenzahl eingetragen wird.



Anzahl Seiten

Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage Felder eingefügt werden, in denen die Anzahl Seiten eingetragen wird.



Fixreport

Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage Fixreports eingefügt werden.



Bild

Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage Bilder eingefügt werden.



Linie

Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage Linien eingefügt werden.



Rechteck

Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage Rechtecke eingefügt werden.



Kurve

Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage Kurven eingefügt werden.



Kalibrierkurve

Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage Kalibrierkurven eingefügt werden.


Funktionen

Im Programmfenster **Reportvorlage** können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- Seite einrichten
- Bereiche im Hauptfenster definieren
- Reportseiten einfügen
- Bausteine einfügen
- Bausteine bearbeiten
- Zoomen
- Seitenansicht anzeigen
- Kommentar zu Reportvorlage eingeben
- Optionen für Reportvorlage definieren
- Reportvorlage speichern

Seite einrichten

Mit dem Menüpunkt **Datei, Seite einrichten** im Fenster **Reportvorlage** öffnet sich das Dialogfenster **Seite einrichten**, in dem Einstellungen zum Reportformat gemacht werden können.

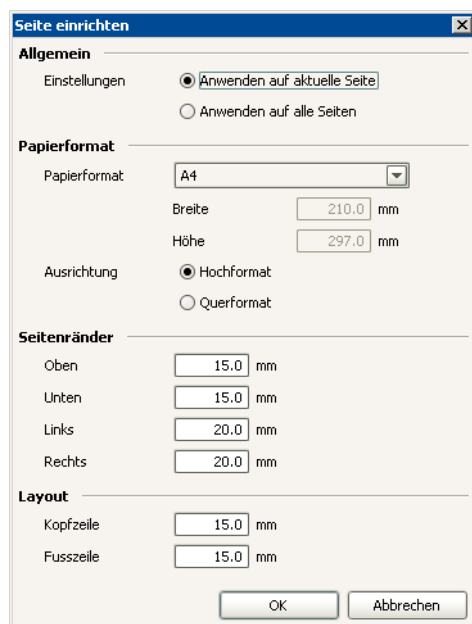

Allgemein (nur für Formularreport)

Einstellungen

[Anwenden auf aktuelle Seite]

Die Seiteneinstellungen werden nur auf die aktuell ausgewählte Reportseite angewendet.

Anwenden auf alle Seiten

Die Seiteneinstellungen werden auf alle Reportseite angewendet.

Papierformat

Papierformat

[A4], Letter, Legal, Benutzerdefiniert

Auswahl des Papierformats. Mit **Benutzerdefiniert** können Breite und Höhe des Papiers festgelegt werden.

Breite

0.0 ... [210.0] ... 499.0 mm

Breite des Papierformats. Dieser Parameter ist nur editierbar für **Papierformat = Benutzerdefiniert**.

Höhe

0.0 ... [297.0] ... 499.0 mm

Höhe des Papierformats. Dieser Parameter ist nur editierbar für **Papierformat = Benutzerdefiniert**.

Ausrichtung

[Hochformat], Querformat

Auswahl des Seitenformats.

Seitenränder

Oben

0.0 ... [15.0] ... 499.0 mm

Oberer Seitenrand.

Unten

0.0 ... [15.0] ... 499.0 mm

Unterer Seitenrand.

Links

0.0 ... [20.0] ... 499.0 mm

Linker Seitenrand.

Rechts

0.0 ... [20.0] ... 499.0 mm

Rechter Seitenrand.

Layout

Kopfzeile

0.0 ... [15.0] ... 499.0 mm

Höhe der Kopfzeile.

Fusszeile

0.0 ... [15.0] ... 499.0 mm

Höhe der Fusszeile.

Bestimmungshöhe


0.0 ... [25.0] ... 499.0 mm (nur für tabellarischen Report)

Höhe des Bereichs für eine einzelne Bestimmung auf einem tabellarischen Report.

Bereiche definieren


Bereiche für Formularreport definieren

Die Bereiche für Kopfzeile und Fusszeile unReportvorlagen - Bild damit der Reportbereich können mit Hilfe der linken Maustaste vergrößert bzw. verkleinert werden.

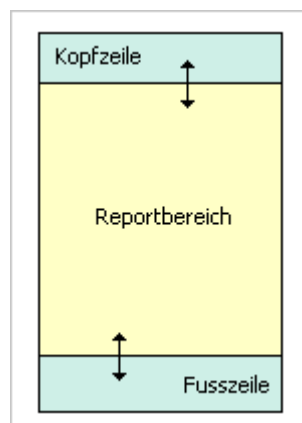

Bereiche für tabellarischen Report definieren

Die Bereiche für Kopfzeile, Fusszeile und Reportbereich können mit Hilfe der linken Maustaste vergrössert bzw. verkleinert werden.

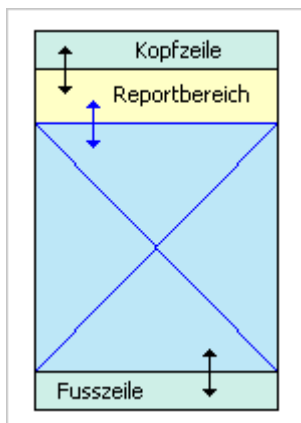

Seiten einfügen

Seite davor einfügen

Mit dem Menüpunkt **Einfügen, Seite davor** im Programmfenster **Reportvorlage** wird eine neue, leere Reportseite vor der angezeigten Reportseite eingefügt.

Seite danach einfügen

Mit dem Menüpunkt **Einfügen, Seite danach** im Programmfenster **Reportvorlage** wird eine neue, leere Reportseite nach der angezeigten Reportseite eingefügt.

Navigieren

Bei Reportvorlagen mit mehreren Seiten kann mit Hilfe der Navigationsleiste zur gewünschten Seite umgeschaltet werden.



Sprung zur ersten Seite.



Sprung zur vorhergehenden Seite.



Sprung zur nächsten Seite.



Sprung zur letzten Seite.

Hinweis

Bei Vorlagen für tabellarische Reports können keine Seiten eingefügt werden.

Bausteine einfügen

Um einen Baustein in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden. Anschliessend öffnet sich automatisch das Eigenschaftfenster zum entsprechenden Baustein.

Formularreport

Folgende Bausteine können in Formularreports eingefügt werden:

- **Kopfzeile**
Textfeld, Datenfeld, Datumfeld, Zeitfeld, Seitenzahl, Anzahl Seiten, Bild, Linie, Rechteck, Kurve, Kalibrierkurve
- **Reportbereich**
Textfeld, Datenfeld, Datumfeld, Zeitfeld, Fixreport, Bild, Linie, Rechteck, Kurve, Kalibrierkurve
- **Fusszeile**
Textfeld, Datenfeld, Datumfeld, Zeitfeld, Seitenzahl, Anzahl Seiten, Bild, Linie, Rechteck, Kurve, Kalibrierkurve

Tabellarischer Report

Folgende Bausteine können in tabellarische Reports eingefügt werden:

- **Kopfzeile**
Textfeld, Datumfeld, Zeitfeld, Seitenzahl, Anzahl Seiten, Bild, Linie, Rechteck
- **Reportbereich**
Textfeld, Datenfeld, Datumfeld, Zeitfeld, Bild, Linie, Rechteck, Kurve, Kalibrierkurve
- **Fusszeile**
Textfeld, Datumfeld, Zeitfeld, Seitenzahl, Anzahl Seiten, Bild, Linie, Rechteck

Bausteine bearbeiten

Auswahl einschalten



Dieses Symbol in der Bausteinleiste muss eingeschaltet werden, damit Bausteine in einer Reportvorlage für das Bearbeiten ausgewählt werden können.

Auswahl eines einzelnen Bausteins

Einzelner Baustein wird durch einen Klick mit der linken Maustaste ausgewählt. Dabei werden unterhalb der Symbolleiste automatisch die entsprechenden Eigenschaften des Bausteins angezeigt.


Auswahl von mehreren Bausteinen

Mehrere Bausteine werden durch Aufziehen eines Rahmens um die gewünschten Bausteine mit der linken Maustaste ausgewählt.

Verschieben, Verkleinern, Vergrössern von Bausteinen



Wenn dieses Cursorsymbol erscheint, können die ausgewählten Bausteine mit gedrückter linker Maustaste auf der Reportvorlage verschoben werden.

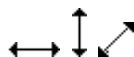

Wenn eines dieser Cursorsymbole erscheint, können die ausgewählten Bausteine mit gedrückter linker Maustaste auf der Reportvorlage verkleinert bzw. vergrössert werden.

Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Löschen von Bausteinen



Ausgewählte Bausteine ausschneiden und in Zwischenablage kopieren.



Ausgewählte Bausteine in Zwischenablage kopieren.



Bausteine aus der Zwischenablage einfügen.



Ausgewählte Bausteine löschen.

Eigenschaften von Bausteinen bearbeiten




Eigenschaftenfenster für den ausgewählten Baustein öffnen. Alternativ können die Eigenschaften auch unterhalb der Symbolleiste direkt bearbeitet werden.

Zoom für Reportvorlagen

Mit dem Symbol  auf der Symbolleiste kann die gewünschte Zoomstufe für die Anzeige der Reportvorlage von 25% bis 400% in Schritten von 25% ausgewählt werden.

Seitenansicht

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei, Seitenansicht** im Programmfenster **Reportvorlage** wird das Fenster **Reportvorschau** geöffnet, in dem eine Seitenvorschau der Reportvorlage mit den Daten der in der Bestimmungsübersicht ausgewählten Bestimmungen angezeigt wird.

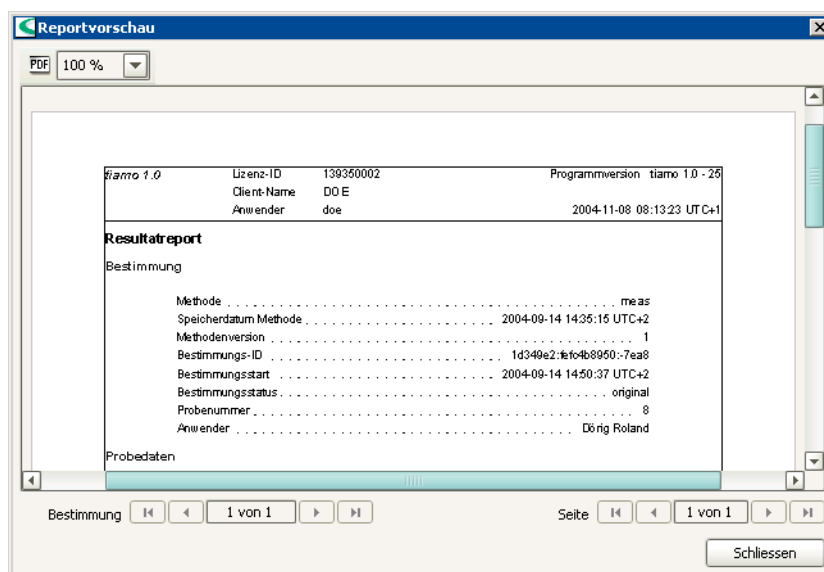

Funktionen



Angezeigten Report als PDF-Datei ausgeben.



Gewünschte Zoomstufe für die Anzeige der Reportvorschau von 25% bis 400% in Schritten von 25% auswählen.

Reportseite auswählen

Bei Reports mit mehreren Seiten kann mit Hilfe der Navigationsleiste **Seite** zur gewünschten Seite umgeschaltet werden.



Sprung zur ersten Seite.



Sprung zur vorhergehenden Seite.



Sprung zur nächsten Seite.



Sprung zur letzten Seite.

Bestimmung auswählen

Sind mehrere Bestimmungen für die Reportanzeige ausgewählt worden, kann mit Hilfe der Navigationsleiste **Bestimmung** zur gewünschten Bestimmung umgeschaltet werden.



Sprung zur ersten Bestimmung.



Sprung zur vorhergehenden Bestimmung.




Sprung zur nächsten Bestimmung.



Sprung zur letzten Bestimmung.

Kommentar

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Bearbeiten, Kommentar** im Programmfenster **Reportvorlage** wird das Fenster **Kommentar zu Reportvorlage** geöffnet, in dem ein Kommentar zur geöffneten Reportvorlage eingegeben werden kann.

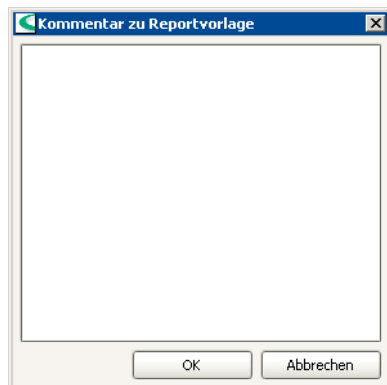

Kommentar

1000 Zeichen

Kommentar zu Reportvorlage, der in der Liste der Reportvorlagen angezeigt wird.

Optionen

Mit dem Menüpunkt **Extras, Optionen** im Programmfenster **Reportvorlage** wird das Fenster **Optionen für Reportvorlagen** geöffnet, in dem ein Kommentar zur geöffneten Reportvorlage eingegeben werden kann.

Masseinheit

Masseinheit

[mm], cm, Zoll

Auswahl der Masseinheit für die Reportvorlagen.

Gitter

X-Distanz

1.0 ... [5.0] ... 100.0 mm

Gitterdistanz in X-Richtung.

Y-Distanz

1.0 ... [5.0] ... 100.0 mm

Gitterdistanz in Y-Richtung.

Gitter anzeigen

ein, [aus]

Gitteranzeige auf der Reportvorlage ein-/ausschalten.

Einrasten an Gitter

ein, [aus]

Einrasten am Gitter auf der Reportvorlage ein-/ausschalten.

Standardschrift

Schriftart

[Arial], Windows-Schriftarten

Auswahl der Standardschriftart für die Reportvorlagen.

Reportvorlage speichern

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei, Speichern** wird eine bestehende, geöffnete Reportvorlage unter ihrem Namen neu gespeichert, ohne dass das Fenster **Reportvorlage speichern** geöffnet wird.

Beim Speichern einer neu erstellten Reportvorlage mit dem Menüpunkt **Datei, Speichern** oder beim Speichern einer bestehenden Reportvorlage mit dem Menüpunkt **Datei, Speichern unter** wird das Fenster **Reportvorlage speichern** geöffnet, in dem ein Name für die Reportvorlage eingegeben oder ausgewählt werden kann.

	Name ▲	Gespeichert	Gespeichert von	Kommentar
▶ 1	example report	2004-11-08 08:24:53 UTC+1	doe	
2	example result overview	2004-08-11 09:47:03 UTC+2	az	

Name

Liste der Reportvorlagen

Die Liste der Probestabellen enthält Informationen zu allen gespeicherten Reportvorlagen. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Gespeichert**, **Gespeichert von**, **Kommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Reportvorlage.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Reportvorlage.

Gespeichert von

Kurzname des Anwenders, welcher die Reportvorlage gespeichert hat.

Kommentar

Kommentar zur Reportvorlage, der als Kommentar zur Reportvorlage eingegeben wurde.

Reportvorlage speichern

Name

50 Zeichen

Eingabe des Namens, unter dem die Reportvorlage gespeichert werden soll.

Hinweis

Der Name der Reportvorlage muss im ganzen Client/Serversystem eindeutig sein.

Speichert die Reportvorlage unter dem gewünschten Namen.

Bausteine

Textfeld

Textfelder dienen zur Ausgabe von beliebigem Text im Report.

Einfügen



Um ein Textfeld in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

X-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Y-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Breite

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Breite des Textfeldes.

Höhe

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Höhe des Textfeldes.

Auswahl der verfügbaren Windows-Schriften.

Schriftgrösse in pt.

Farbauswahl.



Fett.



Kursiv.



Unterstrichen.



Linksbündig.



Zentriert.



Rechtsbündig.



Ein-/Ausschalten des Zeilenumbruchs für mehrzeilige Textfelder.

Text

Texteingabe für Textfeld.

Datenfeld

Datenfelder dienen zur Ausgabe von Bestimmungsdaten im Report.

Einfügen



Um ein Datenfeld in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

X-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Y-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Breite

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Breite des Datenfeldes.

Höhe

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Höhe des Datenfeldes.



Auswahl der verfügbaren Windows-Schriften.



Schriftgrösse in pt.



Farbauswahl.



Fett.



Kursiv.



Unterstrichen.



Linksbündig.



Zentriert.



Rechtsbündig.



Ein-/Ausschalten des Zeilenumbruchs für mehrzeilige Datenfeldes.

Präfix

50 Zeichen

Text, der dem Inhalt des Datenfeldes vorangestellt wird.

Datenfeld

Anzeige von Pfad und Name des ausgewählten Datenfeldes (das Feld ist nicht direkt editierbar). Mit  öffnet sich ein Fenster zur Auswahl des Datenfeldes, in dem alle für die Bestimmungsübersicht verfügbaren Felder baumartig angezeigt werden. Mit einem Doppelklick auf das gewünschte Feld werden Pfad und Name des Datenfeldes eingetragen.

Suffix

50 Zeichen

Text, der dem Inhalt des Datenfeldes nachgestellt wird.

Vorschau

Anzeige eines formatierten Beispieltexes.

Datumsfeld

Datumsfelder dienen zur Ausgabe des aktuellen Datums im Report.

Einfügen



Um ein Datumsfeld in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

X-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Y-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Breite

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Breite des Datumsfeldes.

Höhe

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Höhe des Datumsfeldes.

Auswahl der verfügbaren Windows-Schriften.

Schriftgrösse in pt.

Farbauswahl.



Fett.



Kursiv.



Unterstrichen.



Linksbündig.



Zentriert.



Rechtsbündig.

Präfix

50 Zeichen

Text, der dem Inhalt des Datumsfeldes vorangestellt wird.

Suffix

50 Zeichen

Text, der dem Inhalt des Datumsfeldes nachgestellt wird.

Vorschau

Anzeige des formatierten Datums.

Zeitfeld

Zeitfelder dienen zur Ausgabe der aktuellen Zeit im Report.

Einfügen



Um ein Zeitfeld in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

X-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Y-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Breite

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Breite des Zeitfeldes.

Höhe

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Höhe des Zeitfeldes.



Auswahl der verfügbaren Windows-Schriften.



Schriftgrösse in pt.



Farbauswahl.



Fett.



Kursiv.



Unterstrichen.



Linksbündig.



Zentriert.



Rechtsbündig.

Präfix

50 Zeichen

Text, der dem Inhalt des Zeitfeldes vorangestellt wird.

Suffix

50 Zeichen

Text, der dem Inhalt des Zeitfeldes nachgestellt wird.

Vorschau

Anzeige der formatierten Zeit.

Seitenzahl

In einem Seitenzahl-Feld wird die aktuelle Seitenzahl im Report ausgegeben.

Einfügen



Um ein Seitenzahl-Feld in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste in der Kopf- oder Fusszeile der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

X-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Y-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Breite

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Breite des Seitenzahl-Feldes.

Höhe

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Höhe des Seitenzahl-Feldes.

Auswahl der verfügbaren Windows-Schriften.

Schriftgrösse in pt.

Farbauswahl.



Fett.



Kursiv.



Unterstrichen.



Linksbündig.



Zentriert.



Rechtsbündig.

Präfix

50 Zeichen

Text, der dem Inhalt des Seitenzahl-Feldes vorangestellt wird.

Suffix

50 Zeichen

Text, der dem Inhalt des Seitenzahl-Feldes nachgestellt wird.

Vorschau

Anzeige der formatierten Seitenzahl.

Anzahl Seiten

In diesem Feld wird die totale Anzahl Seiten im Report ausgegeben.

Einfügen



Um ein Feld mit der Anzahl Seiten in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschließend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste in der Kopf- oder Fusszeile der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

X-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Y-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Breite

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Breite des Feldes.

Höhe

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Höhe des Feldes.

Auswahl der verfügbaren Windows-Schriften.

Schriftgrösse in pt.

Farbauswahl.



Fett.



Kursiv.



Unterstrichen.



Linksbündig.



Zentriert.



Rechtsbündig.

Präfix

50 Zeichen

Text, der dem Inhalt des Feldes vorangestellt wird.

Suffix

50 Zeichen

Text, der dem Inhalt des Feldes nachgestellt wird.

Vorschau

Anzeige der formatierten Anzahl Seiten.

Fixreport

Fixreports dienen zur Ausgabe von vordefinierten Teilreports der Bestimmung im Report.

Einfügen



Um einen Fixreport in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

X-Pos.

Anzeige der vordefinierten x-Position für den Fixreport.

Y-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Breite

Anzeige der vordefinierten Breite des Fixreports.

Höhe

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Höhe des Fixreports.

Fixreport

[Berechnungen], Kurven, Meldungen, Messpunktliste, Methodenparameter, Resultatliste, Rohdaten (Endpunkte), Statistikdaten (kurz), Statistikdaten (lang), Titrations- und Messparameter, Unterschriftsliste Bestimmungen, Unterschriftsliste Methoden, Variablen, Verwendete Common Variablen, Verwendete Geräte, Verwendete Sensoren

Auswahl eines vordefinierten Fixreports.

Bild

Ein Bildfeld dient zur Eingabe von beliebigen externen Grafiken auf der Reportvorlage.

Einfügen



Um ein Bild in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

X-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Y-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Breite

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Breite des Textfeldes.

Höhe

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Höhe des Textfeldes.

Grafikdatei

Anzeige von Pfad und Name der ausgewählten Grafikdatei (das Feld ist nicht direkt editierbar). Mit  öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Grafikdatei. Abschliessend werden Pfad und Name der Grafikdatei eingetragen.

Grösse

Angabe, wie die Grafik dargestellt werden soll.

[original]

Originalgrösse.

proportional

Proportionale Vergrösserung bzw. Verkleinerung.

nicht proportional

Nicht proportionale Vergrösserung bzw. Verkleinerung.

Linie

Auf der Reportvorlage können beliebige Linien eingefügt werden.

Einfügen



Um eine Linie in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

X-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Y-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Länge

0.0 ... (max. Seitenbreite) mm

Länge der Linie.

Winkel

0.000 ... 360.000 °

Winkel der Linie.

Linienstärke

0.1 ... [0.5] ... 10.0 mm

Stärke der Linie.



Auswahl der Linienfarbe.



Auswahl der Linienart.

Rechteck

Auf der Reportvorlage können beliebige Rechtecke eingefügt werden.

Einfügen



Um ein Rechteck in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

X-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Y-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Breite

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Breite des Rechtecks.

Höhe

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Höhe des Rechtecks.

Linienstärke

0.1 ... [0.5] ... 10.0 mm

Stärke der Linie für das Rechteck.



Auswahl der Linienfarbe.



Auswahl der Linienart für das Rechteck.



Füllfarbe ein-/ausschalten.



Auswahl der Füllfarbe.

Kurvenfeld

Kurvenfeld

Kurvenfelder dienen zur Ausgabe von Bestimmungskurven im Report.

Einfügen



Um ein Kurvenfeld in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend

durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

Die Eigenschaften für das Kurvenfeld können auf den folgenden 4 Registerkarten eingestellt werden:

- **x-Achse**
Parameter für die grafische Anzeige der Kurve auf der x-Achse.
- **y1-Achse**
Parameter für die grafische Anzeige der Kurve auf der y1-Achse (linke y-Achse).
- **y2-Achse**
Parameter für die grafische Anzeige der Kurve auf der y2-Achse (rechte y-Achse).
- **Optionen**
Optionen für die grafische Anzeige der Kurve.

Hinweis

Die Eigenschaften werden für jedes Kurvenfeld einzeln gespeichert. So ist es z.B. möglich, mehrere verschiedene Kurven für den gleichen Messbefehl in mehreren Kurvenfeldern nebeneinander darzustellen.

Kurvenfeld - x-Achse

X-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Y-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Breite

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Breite des Kurvenfeldes.

Höhe

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Höhe des Kurvenfeldes.

Befehlstyp

[DET], MET, SET, KFT, KFC, MEAS, MEAS T/Flow

Auswahl des Befehlstyps, für den eine Kurve ausgegeben werden soll.

Befehlsname

[nicht definiert], 50 Zeichen

Eingabe des Namens des Befehls, für den die Kurve ausgegeben werden soll. Mit **nicht definiert** wird defaultmässig die erste in der Bestimmung vorhandene Kurve mit dem ausgewählten **Befehlstyp** ausgegeben.

Autoskalierung

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, werden alle Achsen im Kurvenfenster automatisch skaliert. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** nicht editierbar.

Parameter für die grafische Anzeige der Kurve auf der x-Achse.

Grösse

Befehlsabhängige Auswahl

Auswahl der Grösse, die auf der x-Achse dargestellt werden soll.

Beschriftung

50 Zeichen, [auto]

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die x-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Skalierung

Startwert

1 E-8 ... [0.0] ... 1 E+8

Anfangswert für Skalierung der x-Achse.

Endwert

1 E-8 ... [1000.0] ... 1 E+8

Endwert für Skalierung der x-Achse.

Kurvenfeld - y1-Achse

X-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Y-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Breite

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Breite des Kurvenfeldes.

Höhe

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Höhe des Kurvenfeldes.

Befehlstyp

[DET], MET, SET, KFT, KFC, MEAS, MEAS T/Flow

Auswahl des Befehlstyps, für den eine Kurve ausgegeben werden soll.

Befehlsname

[nicht definiert], 50 Zeichen

Eingabe des Namens des Befehls, für den die Kurve ausgegeben werden soll. Mit **nicht definiert** wird defaultmässig die erste in der Bestimmung vorhandene Kurve mit dem ausgewählten **Befehlstyp** ausgegeben.

Autoskalierung

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, werden alle Achsen im Kurvenfenster automatisch skaliert. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** nicht editierbar.

Parameter für die grafische Anzeige der Kurve auf der y1-Achse (linke y-Achse).

Grösse

Befehlsabhängige Auswahl

Auswahl der Grösse, die auf der y1-Achse dargestellt werden soll.

Beschriftung

50 Zeichen, [auto]

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y1-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Skalierung

Startwert

1 E-8 ... [0.0] ... 1 E+8

Anfangswert für Skalierung der y1-Achse.

Endwert

1 E-8 ... [1000.0] ... 1 E+8

Endwert für Skalierung der y1-Achse.

Kurve

Kurvenfarbe

Farbauswahl, [blau]

Auswahl der Farbe für die Kurvenlinie.

Symbol

Symbolauswahl, [kein Symbol]

Auswahl des Symbols für die Anzeige der Messwerte. Mit **kein Symbol** werden die Messpunkte nicht angezeigt.

Symbolfarbe

Farbauswahl, [blau]

Auswahl der Farbe für das Messpunktsymbol.

Glättung

ein, [aus]

Ein-/Ausschalten der Glättung für Kurven.

Glättungsfaktor x-Achse

[0.01] ... 1000

Faktor für Glättung in Richtung der x-Achse.

Glättungsfaktor y-Achse

[0.01] ... 1000

Faktor für Glättung in Richtung der y-Achse.

Originalkurve mitanzeigen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird zusätzlich zur geglätteten Kurve auch die Originalkurve (gestrichelt, gleiche Farbe) angezeigt.

Kurvenfeld - y2-Achse

X-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Y-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Breite

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Breite des Kurvenfeldes.

Höhe

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Höhe des Kurvenfeldes.

Befehlstyp

[DET], MET, SET, KFT, KFC, MEAS, MEAS T/Flow

Auswahl des Befehlstyps, für den eine Kurve ausgegeben werden soll.

Befehlsname

[nicht definiert], 50 Zeichen

Eingabe des Namens des Befehls, für den die Kurve ausgegeben werden soll. Mit **nicht definiert** wird defaultmässig die erste in der Bestimmung vorhandene Kurve mit dem ausgewählten **Befehlstyp** ausgegeben.

Autoskalierung

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, werden alle Achsen im Kurvenfenster automatisch skaliert. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** nicht editierbar.

Parameter für die grafische Anzeige der Kurve auf der y2-Achse (rechte y-Achse).

Grösse

Befehlsabhängige Auswahl

Auswahl der Grösse, die auf der y2-Achse dargestellt werden soll.

Beschriftung

50 Zeichen, [auto]

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y2-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Kurve

Kurvenfarbe

Farbauswahl, [pink]

Auswahl der Farbe für die Kurvenlinie.

Symbol

Symbolauswahl, [kein Symbol]

Auswahl des Symbols für die Anzeige der Messwerte. Mit **kein Symbol** werden die Messpunkte nicht angezeigt.

Symbolfarbe

Farbauswahl, [pink]

Auswahl der Farbe für das Messpunktsymbol.

Glättung

ein, [aus]

Ein-/Ausschalten der Glättung für Kurven.

Glättungsfaktor x-Achse

[0.01] ... 1000

Faktor für Glättung in Richtung der x-Achse.

Glättungsfaktor y-Achse

[0.01] ... 1000

Faktor für Glättung in Richtung der y-Achse.

Kurvenfeld - Optionen

The screenshot shows the 'Eigenschaften - Kurvenfeld' dialog box. At the top, there are input fields for 'X-Pos.' (42.7 mm), 'Y-Pos.' (141.5 mm), 'Breite' (75.2 mm), and 'Höhe' (33.5 mm). Below these are 'Befehlstyp' (DET) and 'Befehlsname' (nicht definiert). A checkbox for 'Autoskalierung' is checked. The 'Optionen' tab is selected, showing several options: 'Gitter anzeigen' (unchecked), 'Gittertyp' (dropdown), 'Gitterfarbe' (color picker), 'Endpunkte anzeigen' (checked), 'Automatische EPs' (black square), 'Manuelle EPs' (red square), 'Hintergrund' (color picker), 'Auswertungslinien anzeigen' (unchecked), 'Tangenten' (color picker), and 'Hilfslinien' (color picker). 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom right.

X-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Y-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Breite

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Breite des Kurvenfeldes.

Höhe

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Höhe des Kurvenfeldes.

Befehlstyp

[DET], MET, SET, KFT, KFC, MEAS, MEAS T/Flow

Auswahl des Befehlstyps, für den eine Kurve ausgegeben werden soll.

Befehlsname

[nicht definiert], 50 Zeichen

Eingabe des Namens des Befehls, für den die Kurve ausgegeben werden soll. Mit **nicht definiert** wird defaultmässig die erste in der Bestimmung vorhandene Kurve mit dem ausgewählten **Befehlstyp** ausgegeben.

Autoskalierung

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, werden alle Achsen im Kurvenfenster automatisch skaliert. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** nicht editierbar.

Optionen für die grafische Anzeige der Kurven.

Gitter anzeigen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird auf dem Hintergrund ein Gitter angezeigt.

Gittertyp

Auswahl an Linientypen

Auswahl des Typs für die Gitterlinien.

Gitterfarbe

Farbauswahl, [dunkelgrau]

Auswahl der Farbe für die Gitterlinien.

Hintergrund

Hintergrundfarbe

Farbauswahl, [weiss]

Auswahl der Farbe für den Kurvenhintergrund.

Endpunkte anzeigen

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, werden die gefundenen Endpunkte mit dem Symbol **◆** auf der Kurve eingezeichnet und mit **EP#** (potentiometrische Endpunkte), **BP#** (Knickpunkt) oder **FP#** (Fixendpunkt) beschriftet.

Automatische EPs

Farbauswahl, [schwarz]

Auswahl der Farbe für automatisch gesetzte Endpunkte.

Manuelle EPs

Farbauswahl, [hellrot]

Auswahl der Farbe für manuell gesetzte Endpunkte.

Auswertungslinien anzeigen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden die Auswertungslinien (Tangenten, Hilfslinien) angezeigt.

Tangenten

Farbauswahl, [grün]

Auswahl der Farbe für die Tangenten- und Auswertungslinien.

Hilfslinien

Farbauswahl, [blau]

Auswahl der Farbe für die Hilfslinien.

Kalibrierkurvenfeld

Kalibrierkurvenfelder dienen zur Ausgabe von Kalibrierkurven im Report.

Einfügen



Um ein Kalibrierkurvenfeld in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

X-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Y-Pos.

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Breite

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Breite des Kalibrierkurvenfeldes.

Höhe

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Höhe des Kalibrierkurvenfeldes.

Befehlsname


[nicht definiert], 50 Zeichen

Eingabe des Namens des Befehls, für den die Kalibrierkurve ausgegeben werden soll. Mit **nicht definiert** wird defaultmässig die erste in der Bestimmung vorhandene Kalibrierkurve mit dem ausgewählten **Befehlstyp** ausgegeben.

4.4.4 Reportvorlagen verwalten

Reportvorlagen verwalten

Mit dem Menüpunkt **Extras, Reportvorlagen, Verwalten...** wird das Fenster **Reportvorlagen verwalten** geöffnet.

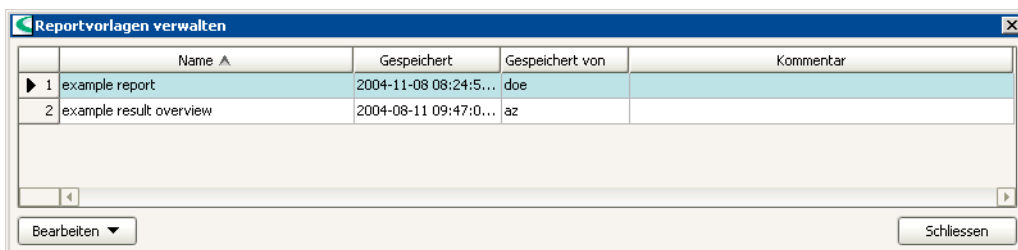

	Name ▲	Gespeichert	Gespeichert von	Kommentar
1	example report	2004-11-08 08:24:5...	doe	
2	example result overview	2004-08-11 09:47:0...	az	

Bearbeiten ▼ Schliessen

Liste der Reportvorlagen

Die Liste der Proben tabellen enthält Informationen zu allen gespeicherten Reportvorlagen. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Gespeichert**, **Gespeichert von**, **Kommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Reportvorlage.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Reportvorlage.

Gespeichert von

Kurzname des Anwenders, welcher die Reportvorlage gespeichert hat.

Kommentar

Kommentar zur Reportvorlage, der als Kommentar zur Reportvorlage eingegeben wurde.

Fenstermenüs



Das Menü **Bearbeiten** unterhalb der Liste der Reportvorlagen enthält die folgenden Menüpunkte:

Umbenennen...

Ausgewählte Reportvorlage umbenennen.

Kopieren

Ausgewählte Reportvorlage(n) kopieren.

Löschen...

Ausgewählte Reportvorlage(n) löschen.

Exportieren...

Ausgewählte Reportvorlage(n) exportieren.

Importieren...

Reportvorlage(n) importieren.

Reportvorlage umbenennen

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Umbenennen...** im Fenster **Reportvorlagen verwalten** öffnet sich das Fenster **Reportvorlage umbenennen** zum Umbenennen der ausgewählten Reportvorlage.



Reportvorlage umbenennen

Reportvorlage 'example report' umbenennen nach

example report

OK Abbrechen

Reportvorlage 'Name' umbenennen nach 50 Zeichen

Eingabe des neuen Namens für die Reportvorlage.

Hinweis

Der Name der Reportvorlage muss im ganzen Client/Serversystem eindeutig sein.

Reportvorlage kopieren

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Kopieren** im Fenster **Reportvorlagen verwalten** werden die ausgewählten Reportvorlagen unter dem Namen **Kopie von 'Reportvorlagenname'** kopiert.

Reportvorlage löschen

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Löschen...** im Fenster **Reportvorlagen verwalten** werden die ausgewählten Reportvorlagen gelöscht.

Reportvorlage exportieren

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Exportieren...** im Fenster **Reportvorlagen verwalten** werden die ausgewählten Reportvorlagen je in eine Datei mit dem Namen **'Name'.mrep** exportiert. Es öffnet sich das Dialogfenster **Verzeichnis für Export wählen**, in dem das Verzeichnis für den Export ausgewählt werden muss.

Reportvorlage importieren

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Importieren...** im Fenster **Reportvorlagen verwalten** öffnet sich das Dialogfenster **Dateien für Import auswählen**, in dem die zu importierenden Reportvorlagen ausgewählt werden müssen. Diese Probentabellen werden anschliessend importiert.

4.5 Vorlagen für Kontrollkarte

4.5.1 Vorlagen für Kontrollkarten verwalten

Mit dem Menüpunkt **Extras, Vorlagen, Vorlagen für Kontrollkarte** wird das Dialogfenster **Vorlagen für Kontrollkarte** geöffnet, in dem global verfügbare Vorlagen für Kontrollkarten verwalten werden können.



Vorlagentabelle

Die Tabelle mit den definierten Vorlagen ist nicht editierbar, sie kann jedoch durch einen Klick auf den Spaltentitel nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Anzeige des Namens der Vorlage.


Resultat

Anzeige des Resultats, für das die Vorlage verwendet wird.

Kommentar

Anzeige des Kommentars zur Vorlage.


Funktionen

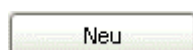

Erstellen einer neuen Vorlage. Es öffnet sich das Dialogfenster **Eigenschaften - Kontrollkarte**, in dem die Eigenschaften für die neue Vorlage definiert werden können.



Öffnen des Dialogfensters **Eigenschaften - Kontrollkarte**, in dem die Eigenschaften der in der Tabelle ausgewählten Vorlage bearbeitet werden können.

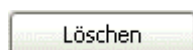

Löschen der in der Tabelle ausgewählten Vorlage.



Kopieren der in der Tabelle ausgewählten Vorlage und Speichern unter dem Namen **Kopie von....**

4.5.2 Eigenschaften

Die Eigenschaften einer Vorlage für Kontrollkarten können auf den folgenden 4 Registerkarten eingestellt werden:

- **Grafikparameter**
Parameter für die grafische Anzeige der Kontrollkarte.

- **Grenzwerte**
Definition von Warn- und Eingreifgrenzen für die Kontrollkarte.
- **Statistik**
Anzeige von Statistikdaten für die Kontrollkarte.
- **Kommentar**
Eingabe eines Kommentars zur Vorlage.

Grafikparameter

Name der Vorlage 50 Zeichen

Name, unter dem die Vorlage für Kontrollkarten in der Konfigurationsdatenbank pro Client gespeichert wird.

Parameter für die grafische Anzeige der Kontrollkarte.

y-Achse

Resultat

[RS01] ... RS25

Auswahl der Resultatspalte, deren Wert auf der y-Achse dargestellt werden soll.

Beschriftung

25 Zeichen, [Resultat]

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y-Achse.

Hintergrund

Hintergrundfarbe

Farbauswahl, [weiss]

Auswahl der Hintergrundfarbe für die Kontrollkarte.

Messwerte

Form

Symbolauswahl, [•]

Auswahl des Symbols für die Anzeige der Messwerte.

Farbe

Farbauswahl, [blau]

Auswahl der Farbe für das Messpunktsymbol.

Messwerte verbinden

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden die Messwertpunkte mit einer Linie verbunden.

Grenzwerte

The screenshot shows a dialog box titled 'Eigenschaften - Kontrollkarte - Standard'. It has a tabbed interface with 'Grenzwerte' selected. The 'Name der Vorlage' field contains 'Standard'. Below are two sections: 'Warngrenzen' and 'Eingreifgrenzen', each with 'Untere Grenze' and 'Obere Grenze' input fields. At the bottom are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Name der Vorlage

50 Zeichen

Name, unter dem die Vorlage für Kontrollkarten in der Konfigurationsdatenbank pro Client gespeichert wird.

Definition von Warn- und Eingreifgrenzen, die auf der Kontrollkarte eingezeichnet werden.

Warngrenzen

Untere Grenze

10 Ziffern

Untere Warngrenze.

Obere Grenze

10 Ziffern

Obere Warngrenze.

Eingreifgrenzen

Untere Grenze

10 Ziffern

Untere Eingreifgrenze.

Obere Grenze

10 Ziffern

Obere Eingreifgrenze.

Statistik

The screenshot shows the same dialog box with the 'Statistik' tab selected. The 'Name der Vorlage' field still contains 'Standard'. Below are three checked checkboxes: 'Statistikdaten anzeigen', 'Mittelwert einzeichnen', and 'Standardabweichung einzeichnen'. The 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom.

Name der Vorlage

50 Zeichen

Name, unter dem die Vorlage für Kontrollkarten in der Konfigurationsdatenbank pro Client gespeichert wird.

Definition der Anzeige von Statistikdaten für die Kontrollkarte.

Statistikdaten anzeigen

[ein], aus

Wird diese Option eingeschaltet, so werden unterhalb der grafischen Darstellung die Statistikdaten für **Mittelwert**, **Standardabweichung**, **Anzahl Messpunkte** sowie **Minimum- und Maximumwert** angezeigt.

Mittelwert einzeichnen

[ein], aus


Wird diese Option eingeschaltet, so wird der **Mittelwert** als ausgezogene Linie in der Farbe der Messwert in der Kontrollkarte eingezeichnet.

Standardabweichung einzeichnen

[ein], aus

Wird diese Option eingeschaltet, so werden die beiden Werte **Mittelwert + absolute Standardabweichung** und **Mittelwert – absolute Standardabweichung** als gestrichelte Linie in der Farbe der Messwert in der Kontrollkarte eingezeichnet.

Kommentar

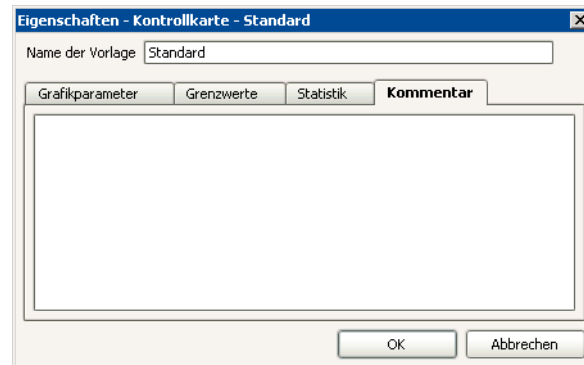

Name der Vorlage

50 Zeichen

Name, unter dem die Vorlage für Kontrollkarten in der Konfigurationsdatenbank pro Client gespeichert wird.

Eingabe eines Kommentars zur Kontrollkarte.

Kommentar


1000 Zeichen

Kommentar zur Kontrollkarte.

4.6 Vorlagen für Kurven überlagern

4.6.1 Vorlagen für Kurvenüberlagerung verwalten

Mit dem Menüpunkt **Extras, Vorlagen, Vorlagen für Kurvenüberlagerung** wird das Dialogfenster **Vorlagen für Kurvenüberlagerung** geöffnet, in dem die pro Client verfügbaren Vorlagen für Kontrollkarten verwalten werden können.

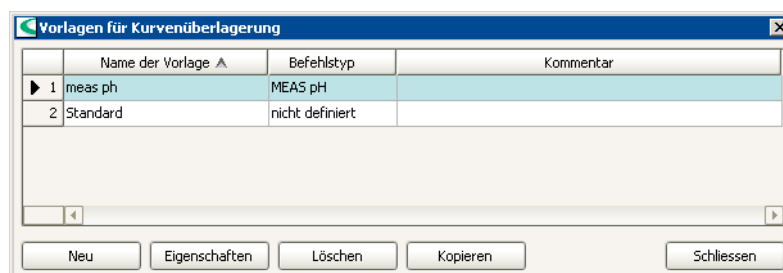

Vorlagentabelle

Die Tabelle mit den definierten Vorlagen ist nicht editierbar, sie kann jedoch durch einen Klick auf den Spaltentitel nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name der Vorlage

Anzeige des Namens der Vorlage.

Befehlstyp

Anzeige des Befehlstyps, für den die Vorlage verwendet werden kann.

Kommentar

Anzeige des Kommentars zur Vorlage.

Funktionen

Neu

Erstellen einer neuen Vorlage. Es öffnet sich das Dialogfenster **Eigenschaften - Kurvenüberlagerung**, in dem die Eigenschaften für die neue Vorlage definiert werden können.

Eigenschaften

Öffnen des Dialogfensters **Eigenschaften - Kurvenüberlagerung**, in dem die Eigenschaften der in der Tabelle ausgewählten Vorlage bearbeitet werden können.

Löschen

Löschen der in der Tabelle ausgewählten Vorlage.

Kopieren

Kopieren der in der Tabelle ausgewählten Vorlage und Speichern unter dem Namen **Kopie von...**

4.6.2 Eigenschaften

Die Eigenschaften einer Vorlage für das Überlagern von Kurven können auf den folgenden 4 Registerkarten eingestellt werden:

- **x-Achse**
Parameter für die grafische Anzeige der überlagerten Kurven auf der x-Achse.

- **y-Achse**
Parameter für die grafische Anzeige der überlagerten Kurven auf der y-Achse.
- **Optionen**
Optionen für die grafische Anzeige der überlagerten Kurven.
- **Kommentar**
Eingabe eines Kommentars zur Vorlage.

x-Achse

Name der Vorlage 50 Zeichen

Name, unter dem die Vorlage für die Kurvenüberlagerung in der Konfigurationsdatenbank pro Client gespeichert wird.

Befehlstyp

Auswahl von Befehlstypen

Auswahl des Befehlstyps, von dem Kurven überlagert werden sollen.

Autoskalierung

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird die x-Achse im Kurvenfenster automatisch skaliert. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** nicht editierbar.

Parameter für die grafische Anzeige der überlagerten Kurven auf der x-Achse.

x-Achse

Grösse

Befehlsabhängige Auswahl

Auswahl der Grösse, die auf der x-Achse dargestellt werden soll.

Beschriftung

25 Zeichen, [auto]

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die x-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Skalierung

Startwert

1 E-8 ... [0.0] ... 1 E+8

Anfangswert für Skalierung der x-Achse.

Endwert

1 E-8 ... [1000.0] ... 1 E+8

Endwert für Skalierung der x-Achse.

y-Achse

Name der Vorlage

50 Zeichen

Name, unter dem die Vorlage für die Kurvenüberlagerung in der Konfigurationsdatenbank pro Client gespeichert wird.

Befehlstyp

Auswahl von Befehlstypen

Auswahl des Befehlstyps, von dem Kurven überlagert werden sollen.

Autoskalierung

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird die y-Achse im Kurvenfenster automatisch skaliert. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** nicht editierbar.

Parameter für die grafische Anzeige der überlagerten Kurven auf der y-Achse.

y-Achse

Grösse

Befehlsabhängige Auswahl

Auswahl der Grösse, die auf der y-Achse dargestellt werden soll.

Beschriftung

25 Zeichen, [auto]

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Messpunkte anzeigen

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, werden die einzelnen Messpunkte auf der Kurve eingezeichnet.

Skalierung

Startwert

1 E-8 ... [0.0] ... 1 E+8

Anfangswert für Skalierung der y-Achse.

Endwert

1 E-8 ... [1000.0] ... 1 E+8

Endwert für Skalierung der y-Achse.

Optionen

Name der Vorlage **50 Zeichen**

Name, unter dem die Vorlage für die Kurvenüberlagerung in der Konfigurationsdatenbank pro Client gespeichert wird.

Befehlstyp **Auswahl von Befehlstypen**

Auswahl des Befehlstyps, von dem Kurven überlagert werden sollen.

Autoskalierung **[ein], aus**

Ist diese Option eingeschaltet, wird die Achsen im Kurvenfenster automatisch skaliert.

Optionen für die grafische Anzeige der überlagerten Kurven.

Gitter anzeigen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird auf dem Hintergrund ein Gitter angezeigt.

Gittertyp **Auswahl an Linientypen**

Auswahl des Typs für die Gitterlinien.

Gitterfarbe **Farbauswahl, [grau]**

Auswahl der Farbe für die Gitterlinien.

Hintergrund

Hintergrundfarbe **Farbauswahl, [weiss]**

Auswahl der Farbe für den Kurvenhintergrund.

Endpunkte anzeigen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden die gefundenen Endpunkte mit dem Symbol **◆** auf der Kurve eingezeichnet und mit **EP#** (potentiometrische Endpunkte), **BP#** (Knickpunkt) oder **FP#** (Fixendpunkt) beschriftet.

Automatische EPs **Farbauswahl, [schwarz]**

Auswahl der Farbe für automatisch gesetzte Endpunkte.

Manuelle EPs **Farbauswahl, [pink]**

Auswahl der Farbe für manuell gesetzte Endpunkte.

Kommentar

Name der Vorlage

50 Zeichen

Name, unter dem die Vorlage für die Kurvenüberlagerung in der Konfigurationsdatenbank pro Client gespeichert wird.

Befehlstyp

Auswahl von Befehlstypen

Auswahl des Befehlstyps, von dem Kurven überlagert werden sollen.

Autoskalierung

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird die Achsen im Kurvenfenster automatisch skaliert.

Eingabe eines Kommentars zur Kurvenüberlagerung.

Kommentar


1000 Zeichen

Kommentar zur Kontrollkarte.

4.7 Exportvorlagen

4.7.1 Verwalten

Mit dem Menüpunkt **Extras, Vorlagen, Exportvorlagen** wird das Dialogfenster **Exportvorlagen** geöffnet, in dem global verfügbare Vorlagen für den manuellen oder automatischen Export von Bestimmungsdaten verwaltet werden können.

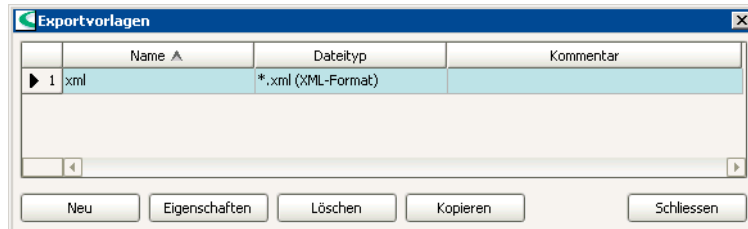

Vorlagentabelle

Die Tabelle mit den definierten Vorlagen ist nicht editierbar, sie kann jedoch durch einen Klick auf den Spaltentitel nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Anzeige des Namens der Exportvorlage.

Dateityp

Anzeige des Dateiformats der Exportvorlage für den Datenexport.

Kommentar

Anzeige des Kommentars zur Exportvorlage.

Funktionen

Neu

Erstellen einer neuen Exportvorlage. Es öffnet sich das Dialogfenster **Exportvorlage - 'Neue Datei'**, in dem die Eigenschaften für die neue Vorlage definiert werden können.

Eigenschaften

Öffnen des Dialogfensters **Exportvorlage - 'Name'**, in dem die Eigenschaften der in der Tabelle ausgewählten Vorlage bearbeitet werden können.

Löschen

Löschen der in der Tabelle ausgewählten Exportvorlage.

Kopieren

Kopieren der in der Tabelle ausgewählten Exportvorlage und Speichern unter dem Namen **Kopie von...**.

4.7.2 Eigenschaften

Mit **[Eigenschaften]** im Dialogfenster **Exportvorlagen** wird das Dialogfenster **Exportvorlage 'Name'** geöffnet, in dem die Eigenschaften der ausgewählten Exportvorlage bearbeitet werden können.

Name

50 Zeichen

Name der Exportvorlage.

Kommentar

250 Zeichen

Frei definierbarer Kommentar zur Exportvorlage.

Zielverzeichnis

1000 Zeichen

Eingabe oder Auswahl (mit ) des Pfades für das Verzeichnis, in dem die Exportdatei gespeichert wird.

Dateityp

Wahl des Dateiformats für den Datenexport:

[*.mdet (tiamo-Format)]

Programm-spezifisches Datenaustauschformat, das nur in andere *tiamo*-Datenbanken importiert werden kann.

*.csv (Comma Separated)

Datenaustauschformat mit unformatiertem Text, das in andere PC-Programme (z.B. Excel, Access) importiert werden kann.

*.slk (SLK-Format)

Datenaustauschformat mit formatiertem Text, das in andere PC-Programme (z.B. Excel) importiert werden kann.

*.xml (XML-Format)

Datenaustauschformat mit XML-Code, das in entsprechende PC-Programme importiert werden kann.

Felder auswählen

Öffnen des Dialogfensters **Felder auswählen**, in dem die gewünschten Felder für den Export ausgewählt, in der gewünschten Reihenfolge angeordnet und umbenannt werden können.

Hinweis

Die Feldauswahl ist nur für die Dateitypen ***.csv** und ***.slk** möglich. Bei ***.mdet** und ***.xml** werden immer sämtliche Felder exportiert.

Optionen

Öffnen des Dialogfensters **Optionen für CSV-Format**, in dem Trennzeichen definiert werden können.

Hinweis

Die Optionen sind nur für den Dateityp ***.csv** einstellbar.

Dateiname

Für die Definition des Namens der Exportdatei kann eine der folgenden Optionen gewählt werden:

Bestimmungs-ID

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, wird der Name der Exportdatei aus der eindeutigen **Bestimmungs-ID**, dem Datumsstempel **-JJJJMMDD-HHMMSS** und dem Suffix für das Format gebildet.

Probenidentifikation

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, wird der Name der Exportdatei aus der ausgewählten Probenidentifikation **ID1...ID8**, dem Datumsstempel **-JJJJMMDD-HHMMSS** und dem Suffix für das Format gebildet. Falls der erzeugte Namen im Verzeichnis bereits vorhanden ist, wird zusätzlich eine Versionsnummer an das Datum angehängt.

Abfrage bei jedem Export

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, wird der Name der Exportdatei bei jedem Export abgefragt. Zusätzlich zum eingegebenen Namen wird automatisch der **Clientname** und der Datumsstempel **-JJJJMMDD-HHMMSS** hinzugefügt.

Fixer Dateiname (Daten anhängen)

ein, [aus]


Ist diese Option ausgewählt, wird der Name der Exportdatei aus dem hier eingegebenen Namen und dem Suffix für das Format gebildet. Ist die Datei im Verzeichnis bereits vorhanden, werden die Daten an diese Datei angehängt.

Hinweis

Die Option **Fixer Dateiname** kann nur für den Dateityp ***.csv** oder ***.slk** ausgewählt werden.

Felder auswählen

Mit **[Felder auswählen]** im Eigenschaftensfenster für Exportvorlagen öffnet sich das Dialogfenster **Felder auswählen**, in dem für die Dateitypen ***.csv** und ***.slk** die Felder für den Datenexport ausgewählt werden können.

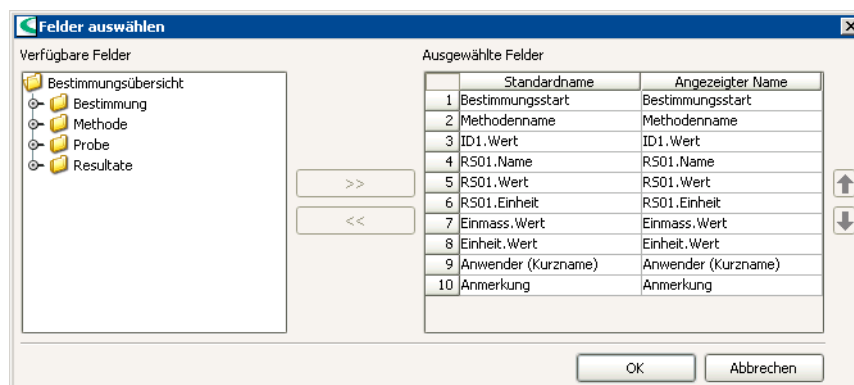

Verfügbare Felder

Anzeige aller Felder, die exportiert werden können.

Ausgewählte Felder

Anzeige aller Felder, die exportiert werden.

Standardname


Nicht editierbarer Name des Feldes, das exportiert wird.

Angezeigter Name

Vom Anwender editierbarer Feldname für das exportierte Feld. Defaultmäßig ist hier der **Standardname** eingetragen. Wird der Feldname gelöscht, erscheint wieder der **Standardname**.



Hinzufügen des ausgewählten Feldes.

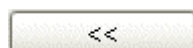


Entfernen des ausgewählten Feldes.



Ändern der Reihenfolge der exportierten Felder durch Verschieben des ausgewählten Feldes nach oben bzw. nach unten.

Optionen

Mit **[Optionen]** im Eigenschaftensfenster für Exportvorlagen öffnet sich das Dialogfenster **Optionen für CSV-Format**, in dem Trennzeichen definiert werden können.

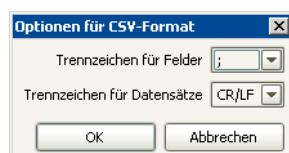

Trennzeichen für Felder

[;] , , Tab

Wahl des Trennzeichens für Felder.

Trennzeichen für Datensätze

[CR/LF], CR, LF

Wahl des Trennzeichens für Datensätze.

4.8 Unterfenster Bestimmungsübersicht

4.8.1 Allgemeines

Übersicht

Allgemeines

Das Unterfenster **Bestimmungsübersicht** zeigt ausgewählte Daten für die in der geöffneten Datenbank enthaltenen Bestimmungen in tabellarischer Form an. Es wird im Programmteil **Datenbank** immer angezeigt, d.h. es kann nicht aus der Datenbankansicht entfernt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrößert und verkleinert und auch maximiert werden.

Elemente

Das Unterfenster **Bestimmungsübersicht** umfasst die folgenden Elemente:

- Bestimmungstabelle
- Filterauswahl
- Navigationsleiste

Bestimmungstabelle

Bestimmungsübersicht									
Filter	Alle Bestimmungen			Statistik	Alle				
Bestimmungsstart	Methodenname	ID1.Wert	RS01.Name	RS01.Wert	RS01.Einheit	Einmass.Wert	Einheit.Wert	Anwender (Kurzname)	
1 2004-10-11 13:52:00 UTC+2	Karl Fischer	Titrand	Gesamtzeit	85.18	s	0.38458	g	CH1_L	
2 2004-10-11 13:49:24 UTC+2	Karl Fischer	Titrand	Gesamtzeit	83.29	s	0.39650	g	CH1_L	
3 2004-10-11 13:46:13 UTC+2	Karl Fischer	Titrand	Gesamtzeit	84.63	s	0.41985	g	CH1_L	
4 2004-09-24 11:18:11 UTC+2	Zweiphasen-Titration anionischer Tenside		mmol anionische Tenside / 100 g Probe	28.40	mmol/100 g	0.2066	g	CH1_L	
5 2004-09-24 10:44:21 UTC+2	Zweiphasen-Titration anionischer Tenside		mmol anionische Tenside / 100 g Probe	ungültig	mmol/100 g	0.2326	g	CH1_L	
6 2004-09-24 09:34:15 UTC+2	Zweiphasen-Titration anionischer Tenside		mmol anionische Tenside / 100 g Probe	29.51	mmol/100 g	0.2064	g	CH1_L	
7 2004-09-24 09:01:51 UTC+2	Zweiphasen-Titration anionischer Tenside		mmol anionische Tenside / 100 g Probe	29.12	mmol/100 g	0.2386	g	CH1_L	
8 2004-09-24 07:56:51 UTC+2	Zweiphasen-Titration anionischer Tenside		mmol anionische Tenside / 100 g Probe	7.29	mmol/100 g	0.2548	g	CH1_L	
9 2004-09-23 15:03:49 UTC+2	Zweiphasen-Titration anionischer Tenside	flüssig Waschmittel	mmol anionische Tenside / 100 g Probe	28.79	mmol/100 g	0.2390	g	CH1_L	
10 2004-09-23 13:47:10 UTC+2	Zweiphasen-Titration anionischer Tenside	flüssig Waschmittel	mmol anionische Tenside / 100 g Probe	34.00	mmol/100 g	0.2256	g	CH1_L	
11 2004-09-23 08:38:56 UTC+2	Kationische Tenside		Kationische Tenside	0.25	meq/g	0.1909	g	CH1_L	
12 2004-09-23 08:25:44 UTC+2	Kationische Tenside		Kationische Tenside	0.29	meq/g	0.1169	g	CH1_L	
13 2004-09-23 08:06:22 UTC+2	Kationische Tenside		Kationische Tenside	0.28	meq/g	0.1881	g	CH1_L	

Datenanzeige

In der Bestimmungstabelle werden die in der Spaltenanzeige definierten Informationen zu den Bestimmungen angezeigt. Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mauscursors auf dem Feld als **Tooltip** angezeigt.

Wird ein Resultatwert überwacht und liegt innerhalb der im **CALC**-Befehl definierten Grenzwerte, so wird er mit **grüner** Textfarbe angezeigt. Liegt er ausserhalb der Grenzwerte, so wird der Wert mit **roter** Textfarbe angezeigt.

Hinweis

Bei Zeilen mit roten Einträgen wird zusätzlich der Hintergrund der Zeilennummer rot markiert.

Aktualisierung

Solange der Programmteil **Datenbank** geöffnet bleibt, werden Änderungen in der Bestimmungstabelle, die durch laufende Bestimmungen oder andere Anwender verursacht werden (Hinzufügen, Verändern oder Löschen von Datensätzen), nicht automatisch angezeigt. Die Tabelle muss entweder mit Bestimmungen, Aktualisie-

ren aktualisiert oder neu sortiert bzw. gefiltert werden. Bei jedem Umschalten von einem anderen Programmteil auf den Programmteil **Datenbank** wird die Bestimmungstabelle automatisch aktualisiert.

Tabellenansicht

Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**
Einstellen der Spaltenbreite.
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**
Einstellen der optimalen Spaltenbreite.
- **Ziehen des Spaltentitels**
Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort.


Datensatzauswahl und Tabellennavigation

Die in der Tabelle ausgewählten Bestimmungen werden türkis dargestellt, die fokussierte Bestimmung, deren Daten in den anderen Unterfenstern angezeigt werden, wird mit einem Pfeil vor der Zeilennummer markiert. In der Tabelle bestehen verschiedene Möglichkeiten zur Datensatzauswahl.

In der Bestimmungstabelle können gleichzeitig nicht mehr als 200 Bestimmungen angezeigt werden. Sind in der Datenbank mehr als 200 Datensätze vorhanden, muss mit Hilfe der Navigationsleiste zu weiteren Sätzen von Bestimmungen umgeschaltet werden.

Spaltenanzeige

Mit **Ansicht, Eigenschaften, Spaltenanzeige** wird das Dialogfenster **Spaltenanzeige** geöffnet. Hier können die Spalten definiert werden, welche in der Bestimmungstabelle angezeigt werden sollen.

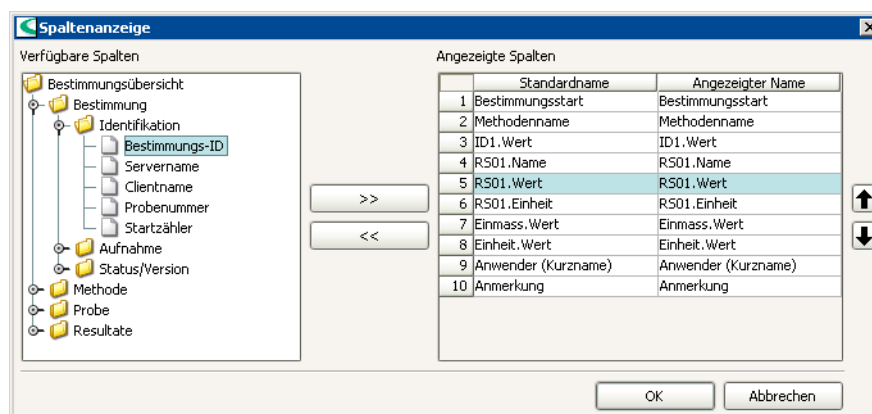

Verfügbare Spalten


Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Bestimmungstabelle angezeigt werden können.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Bestimmungstabelle angezeigt werden.



Hinzufügen der ausgewählten Spalte in die Tabelle.

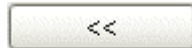

Entfernen der ausgewählten Spalte aus der Tabelle.



Ändern der Reihenfolge der angezeigten Spalten durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach oben bzw. nach unten.

Filterauswahl

Filter

Auswahl des Filters, nach dem die Bestimmungstabelle gefiltert werden soll:

Alle Bestimmungen

Die Tabelle wird ungefiltert angezeigt.

Alle Statistikdatensätze

Die Tabelle wird so gefiltert, dass alle Bestimmungen angezeigt werden, die statistisch mit der ausgewählten Bestimmung verknüpft sind.

Schnellfilter

Die Tabelle wird nach dem zuletzt definierten Schnellfilter gefiltert.

Temporärer Filter

Die Tabelle wird nach dem zuletzt definierten, noch nicht gespeicherten Spezialfilter gefiltert.

Filtername

Die Tabelle wird nach dem ausgewählten, gespeicherten Spezialfilter gefiltert.

Statistik

Mit dem hier ausgewählten Statistik-Filter können die in der Bestimmungstabelle angezeigten Bestimmungen unabhängig von bereits angewendeten Filtern zusätzlich in Bezug auf die durch die Methode erzeugten Statistikdaten gefiltert werden.


Alle

Für alle Statistikserien werden sämtliche Bestimmungen angezeigt.

Letzte

Für alle Statistikserien wird jeweils nur die letzte Bestimmung angezeigt.

Navigationsleiste

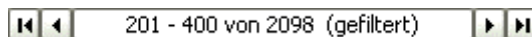


Die unterhalb der Bestimmungstabelle angezeigte Navigationsleiste dient zum Navigieren bei umfangreichen Tabellen, bei denen nicht mehr alle Bestimmungen gleichzeitig angezeigt werden können. Sie enthält die folgenden Elemente:



Sprung zum ersten Satz an Bestimmungen in der Tabelle.



Zurückschalten zum vorhergehenden Satz an Bestimmungen in der Tabelle.

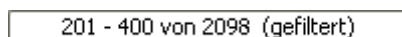

Anzeige des ausgewählten Satzes ##### - ##### an Bestimmungen in der Tabelle. Falls die Tabelle nicht gefiltert wird, erscheint zusätzlich die Ge-

samtzahl aller Bestimmungen. Falls die Tabelle gefiltert wird, erscheint die Gesamtzahl der gefilterten Bestimmungen mit dem Zusatz **(gefiltert)**.



Weiterschalten zum nächsten Satz an Bestimmungen in der Tabelle.



Sprung zum letzten Satz an Bestimmungen in der Tabelle.

Tabellennavigation

In der Bestimmungstabelle kann mit der Maus mit Hilfe der vertikalen und horizontalen Rollbalken navigiert werden. Zusätzlich bestehen die folgenden Möglichkeiten über die Tastatur:

- [↑]** Bewegen des Zeilen-Cursors um ein Feld nach oben.
- [↓]** Bewegen des Zeilen-Cursors um ein Feld nach unten.
- [Ctrl] [End]** Sprung zur letzten Bestimmung des aktuellen Satzes.
- [Ctrl] [Home]** Sprung zur ersten Bestimmung des aktuellen Satzes.
- [Page Up]** Rückwärts blättern innerhalb des aktuellen Satzes.
- [Page Down]** Vorwärts blättern innerhalb des aktuellen Satzes.
- [Alt] [End]** Sprung zur letzten Bestimmung (absolut).
- [Alt] [Home]** Sprung zur ersten Bestimmung (absolut).
- [Alt] [←]** Sprung zum ersten Datensatz des vorhergehenden Satzes.
- [Alt] [→]** Sprung zum ersten Datensatz des nächsten Satzes.

In der Bestimmungstabelle können gleichzeitig nicht mehr als 200 Bestimmungen angezeigt werden. Sind in der Datenbank mehr als 200 Bestimmungen vorhanden, muss mit Hilfe der Navigationsleiste zu weiteren Sätzen von Bestimmungen umgeschaltet werden.

Datensatzauswahl

Die in der Tabelle ausgewählten Bestimmungen werden türkis dargestellt, die fokussierte Bestimmung, deren Daten in den anderen Unterfenstern angezeigt werden, wird mit einem Pfeil vor der Zeilennummer markiert. Wird eine Datenbank geöffnet, so ist immer die erste Bestimmung ausgewählt und fokussiert.

Für die Auswahl von Bestimmungen in der Bestimmungstabelle bestehen folgende Möglichkeiten:

- **Einzelne Bestimmungen**
Einzelne Bestimmungen werden durch Klicken mit der Maus innerhalb der Zeile (inklusive Zeilennummer) ausgewählt. Diese Bestimmung, deren Daten in den anderen geöffneten Unterfenstern angezeigt werden, ist nun fokussiert und erhält einen Pfeil vor der Zeilennummer.
- **Mehrere, aufeinander folgende Bestimmungen**
Um mehrere, aufeinander folgende Bestimmungen auszuwählen, kann der gewünschte Bereich mit gedrückter linker Maustaste selektiert

werden. Ebenfalls möglich ist die Auswahl eines Bereichs mit Klick auf die erste Bestimmung und **[Shift] & Klick** auf die letzte Bestimmung. Die zuletzt ausgewählte Bestimmung erhält den Fokus.

- **Mehrere, nicht aufeinander folgende Bestimmungen**
Um mehrere, nicht aufeinander folgende Bestimmungen auszuwählen, müssen die einzelnen Bestimmungen bei gedrückter **Ctrl-Taste** mit der linken Maustaste selektiert werden. Die zuletzt ausgewählte Bestimmung erhält den Fokus.
- **Alle Bestimmungen**
Mit **[Ctrl] [A]** oder durch Klicken auf das oberste, linke Tabellenfeld werden alle gefilterten Bestimmungen innerhalb des aktuellen Satzes an Bestimmungen ausgewählt. Der Fokus bleibt dabei erhalten.

4.8.2 Funktionen

Funktionen

Mit den in der Bestimmungstabelle ausgewählten Bestimmungen können folgende Funktionen ausgeführt werden:

Bestimmungen bearbeiten

- Bestimmungen aktualisieren
- Bestimmungskommentar eingeben
- Bestimmungen unterschreiben
- Bestimmungen exportieren
- Bestimmungen importieren
- Bestimmungen nachbearbeiten
- Bestimmungen löschen

Bestimmungen suchen und filtern

- Bestimmungen suchen
- Bestimmungen filtern

Weitere Funktionen

- Bestimmungsmethode anzeigen
- Bestimmungshistory anzeigen
- Kalibrierkurve anzeigen
- Kontrollkarte anzeigen
- Kurven überlagern
- Bestimmungsübersicht drucken
- Report drucken

Bestimmungstabelle aktualisieren


Mit dem Menüpunkt **Ansicht, Aktualisieren** oder dem Symbol  im Programmfenster **Datenbank** wird die Bestimmungstabelle aktualisiert.

Hinweis

Die Bestimmungstabelle wird beim Öffnen der Datenbank und bei einem Wechsel von einem anderen Programmteil auf den Programmteil **Datenbank** automatisch aktualisiert, danach aber nur noch, wenn neu sortiert oder gefiltert wird.

Bestimmungskommentar

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Kommentar...** oder dem Symbol  öffnet sich das Dialogfenster **Bestimmungskommentar**, in dem ein neuer Kommentar zur ausgewählten Bestimmung eingegeben oder ein bestehender bearbeitet werden kann.

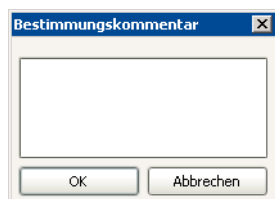

Der so eingegebene Kommentar erscheint automatisch als Tooltip-Text, wenn der Cursor länger als 1 Sekunde auf dem Zeilennummerierungsfeld einer Zeile in der Bestimmungstabelle verweilt. Zusätzlich wird er auch im Informationsfenster angezeigt.

Bestimmungen suchen

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Suchen** oder dem Symbol  im Programmfenster **Datenbank** öffnet sich das Dialogfenster **Suchen - Datenbank** für die Suche nach Bestimmungen.



Suchen nach

Text

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, kann ein Suchbegriff definiert werden, nach dem in Spalten vom Typ **Text** gesucht wird.

[=], <>

Im ersten Feld wird der Vergleichsoperator für den Suchbegriff definiert.

250 Zeichen

Im zweiten Feld wird ein Textausdruck als Suchbegriff definiert. Die letzten 10 Suchbegriffe werden gespeichert und können ausgewählt werden. Im Suchbegriff können die folgenden Platzhalter verwendet werden:

^?

Platzhalter für beliebiges Zeichen.

^#

Platzhalter für beliebige Ziffer.

^\$

Platzhalter für beliebigen Buchstaben.

^*

Platzhalter für beliebige Zeichenfolge.

Zahl

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, kann ein Suchbegriff definiert werden, nach dem in Spalten vom Typ **Zahl** gesucht wird.

[=], <>, <, <=, >, >=

Im ersten Feld wird der Vergleichsoperator für den Suchbegriff definiert.

250 Zeichen

Im zweiten Feld wird ein Zahlenwert als Suchbegriff definiert. Die letzten 10 Suchbegriffe werden gespeichert und können ausgewählt werden.

Datum

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, kann ein Suchbegriff definiert werden, nach dem in Spalten vom Typ **Datum** gesucht wird.

[=], <>, <, <=, >, >=

Im ersten Feld wird der Vergleichsoperator für den Suchbegriff definiert.

Datumsauswahl

Im zweiten Feld wird ein Datum als Suchbegriff definiert. Das Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden. Die letzten 10 Suchbegriffe werden gespeichert und können ausgewählt werden.

Heute

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird nach dem aktuellen Datum gefiltert. Im nebenstehenden Feld kann zusätzlich ein Bereich in Tagen (**-999 ... 999**) definiert werden, nach dem ausgehend vom aktuellen Datum gesucht werden soll.

Werte ausserhalb der Grenzwerte

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, wird nach Werten gesucht, die ausserhalb der definierten Grenzwerte liegen (rot dargestellte Werte).

Ungültige Werte

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, wird nach Werten mit dem Eintrag **ungültig** gesucht.

Suchoptionen

Suchbereich

[Alle Spalten], 'Spaltenname'

Auswahl des Bereichs, in dem gesucht werden soll. Mit **Alle Spalten** wird in sämtlichen Spalten gesucht. Wird eine bestimmte Spalte ausgewählt, wird nur in dieser Spalte gesucht.

Suchrichtung

[Gesamt], Nach unten, Nach oben

Wahl der Suchrichtung. Mit **Nach unten** wird bis ans Ende, mit **Nach oben** bis an den Anfang der Datenbank gesucht. Mit **Gesamt** wird nach unten bis ans Ende der Datenbank und anschliessend wieder von oben bis zum fokussierten Datensatz gesucht.

Gross-/Kleinschreibung beachten

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird beim Suchen in Spalten vom Typ **Text** auf Gross-/Kleinschreibung geachtet.

Nur ganzes Wort suchen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, muss beim Suchen nach Text der Feldinhalt mit dem Suchbegriff identisch sein (keine Teil-uche).

Weitersuchen

Weitersuchen bis zur nächsten Fundstelle des Suchbegriffs.

Bestimmungen filtern

Für das Filtern von Bestimmungen in der Bestimmungstabelle gibt es die folgenden Möglichkeiten:


- Filterauswahl in der Filterleiste
- Schnellfilter
- Spezialfilter
- Letzter Filter
- Filter entfernen

Letzter Filter

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Filter, Letzter Filter** oder dem Symbol  im Programmteil **Datenbank** wird der zuletzt angewendete Filter wieder aktiviert.

Schnellfilter

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Filter, Schnellfilter** oder dem Symbol  im Programmfenster **Datenbank** kann eine Schnellfilterung nach dem Inhalt des ausgewählten Tabellenfeldes durchgeführt werden. Nach der Auswahl dieser Funktion wird beim Navigieren innerhalb der Bestimmungstabelle das Feld, in dem sich der Cursor befindet, farbig hinterlegt. Gleichzeitig erscheint das folgende, spezielle Filtersymbol:

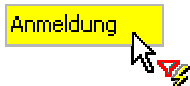


Durch Klicken mit der linken Maustaste wird der Inhalt des in der Tabelle ausgewählten Feldes als Filterbedingung gesetzt und dieser Filter direkt auf die Tabelle angewendet.

Hinweis

Innerhalb der gefilterten Tabelle kann der Schnellfilter erneut angewendet werden, so dass die Anzahl Einträge schrittweise eingeschränkt werden kann.

Spezialfilter

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Filter, Spezialfilter...** oder dem Symbol  im Programmfenster **Datenbank** öffnet sich das Dialogfenster **Spezialfilter** für die Definition von anwenderspezifischen Filtern.

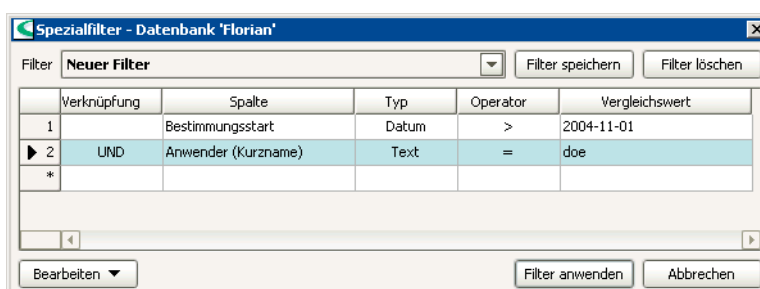

	Verknüpfung	Spalte	Typ	Operator	Vergleichswert
1		Bestimmungstart	Datum	>	2004-11-01
2	UND	Anwender (Kurzname)	Text	=	doe
*					

Filter

Filtername, [Neuer Filter]

Auswahl des Filters, der zum Bearbeiten geladen werden soll. Standardmässig wird eine leere Tabelle unter dem Namen **Neuer Filter** geladen.

Filter speichern

Öffnen des Dialogfensters **Filter speichern**, in dem die in der Tabelle eingetragenen Filterbedingungen unter dem gewünschten Namen als Spezialfilter gespeichert werden können.

Filter löschen

Der aktuell geladene Spezialfilter wird gelöscht.

Tabellenansicht

Die Übersichtstabelle zeigt alle definierten Filterbedingungen an und ist selber nicht direkt editierbar. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**
Einstellen der Spaltenbreite
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**
Einstellen der optimalen Spaltenbreite

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mausursors auf dem Feld als **Tooltip** angezeigt.

Zur Bedeutung der Spalten siehe **Filterbedingung bearbeiten**.

Funktionen

Bearbeiten ▼

Das Menü **Bearbeiten** unterhalb der Filtertabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Zeile bearbeiten

Öffnen des Dialogfensters **Filterbedingung bearbeiten**, in dem die Filterbedingung der in der Tabelle ausgewählten Zeile bearbeitet werden können.

Neue Zeile einfügen

Neue, leere Zeile oberhalb der in der Tabelle ausgewählten Zeile einfügen. Dabei öffnet sich automatisch das Dialogfenster **Filterbedingung bearbeiten**.

Zeilen ausschneiden

Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage übertragen.

Zeilen kopieren

Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage kopieren.

Zeilen einfügen

Zeilen aus der Zwischenablage oberhalb ausgewählten Zeile einfügen.

Zeilen löschen

Ausgewählte Zeilen löschen.

Filter anwenden

Filterbedingungen auf die Bestimmungstabelle anwenden.

Filterbedingung bearbeiten

Mit **Bearbeiten**, **Zeile bearbeiten** öffnet sich das Dialogfenster **Filterbedingung # bearbeiten**, in dem die in der Filtertabelle ausgewählte Filterbedingung bearbeitet werden kann.



Verknüpfung

[UND], ODER

Auswahl der Verknüpfungsart (logischer Operator) mit der vorhergehenden Filterbedingung.

Spalte

Spaltenname

Auswahl der Spalte aus den in der Bestimmungstabelle angezeigten Spalten (zuoberst angezeigt) sowie sämtlichen weiteren im Datensatz für das Filtern verfügbaren Spalten, für die eine Bedingung formuliert werden soll.

Typ

[Text], Zahl, Datum

Auswahl des Formattyps für Spalten, bei denen mehrere Typen möglich sind (z.B. für **ID1.Wert**). Bei Spalten mit fixem Typ wird dieser nur angezeigt.

Operator

[=], <>, leer, nicht leer (für **Typ = Text**)

[=], <>, <, <=, >, >=, ungültig, ausserhalb Grenzen (für **Typ = Zahl**)

[=], <>, <, <=, >, >=, Heute (für **Typ = Datum**)

Auswahl des Vergleichsoperators für die Filterbedingung.

Hinweis

Wird für Datumsfelder der **Operator Heute** ausgewählt, wird nach dem aktuellen Datum gefiltert. Im Feld **Vergleichswert** kann zusätzlich ein Bereich in Tagen (-9999 ... 9999) definiert werden, nach dem ausgehend vom aktuellen Datum gefiltert werden soll.

Vergleichswert

250 Zeichen, * als Platzhalter (für **Typ = Text**)

beliebige Zahl (für **Typ = Zahl**)

beliebiges Datum (für **Typ = Datum**)

-999 ... 999 (für **Typ = Datum** und **Operator = Heute**)

Auswahl oder Eingabe des Vergleichswertes für die Filterbedingung.

Gross-/Kleinschreibung beachten

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird beim Filtern von Spalten vom Typ **Text** auf Gross-/Kleinschreibung geachtet.


Stern (*) als Platzhalter verwenden

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, kann beim Filtern von Spalten vom Typ **Text** der Stern * als Platzhalter für beliebige Zeichenfolgen verwendet werden.

Filter speichern

Mit der Schaltfläche **[Filter speichern]** öffnet sich das Dialogfenster **Filter speichern** für das Speichern eines Spezialfilters.

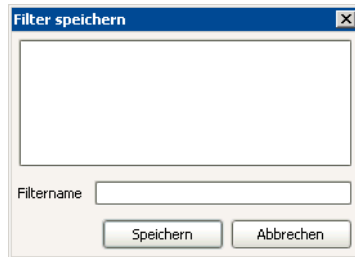

Im oberen Feld werden sämtliche gespeicherten Spezialfilter angezeigt.

Filtername

50 Zeichen

Name, unter dem der Spezialfilter gespeichert werden soll.



Filter unter dem angegebenen Namen speichern.

Hinweis

Die Filter werden global in der Konfigurationsdatenbank gespeichert und sind so für alle Clients verfügbar.

Alle Statistikdatensätze

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Filter, Alle Statistikdatensätze** oder dem Symbol  im Programmteil **Datenbank** wird werden alle Bestimmungen angezeigt, die statistisch mit der ausgewählten Bestimmung verknüpft sind.

Filter entfernen

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Filter, Filter entfernen** oder dem Symbol  im Programmfenster **Datenbank** wird der zuletzt angewendete Filter wieder entfernt und es werden alle Bestimmungen angezeigt.

Bestimmungen unterschreiben

Regeln

Bestimmungen können in *tiamo* in zwei Stufen **elektronisch unterschrieben** werden. Dabei gelten folgende Regeln:

- **Unterschriftsstufen**
Bestimmungen können durch Eingabe des Anwendernamens und des Passwortes in zwei Stufen (Unterschrift Stufe 1 und Unterschrift Stufe 2) unterschrieben werden.
- **Mehrmaliges Unterschreiben**
Bestimmungen können auf jeder Stufe mehrmals unterschrieben werden. Alle Unterschriften werden gespeichert und im Audit Trail dokumentiert.
- **Unterschreiben auf Stufe 1**
Ist auf Stufe 2 unterschrieben worden, kann nicht mehr auf Stufe 1 unterschrieben werden.
- **Unterschreiben auf Stufe 2**
Auf Stufe 2 kann erst unterschrieben werden, wenn bereits auf Stufe 1 unterschrieben wurde.

- **Unterschiedliche Anwender**
Der gleiche Anwender darf nur entweder auf Stufe 1 oder auf Stufe 2 unterschreiben.
- **Begründung und Kommentar**
Zu jeder Unterschrift gehört eine Begründung, die aus vordefinierten Standardbegründungen ausgewählt werden muss. Zusätzlich kann ein weiterer Kommentar eingegeben werden.
- **Gespeicherte Daten**
Zu jeder Unterschrift werden Unterschriftsdatum, Anwendername, Voller Name, Begründung und Kommentar gespeichert.
- **Löschen von Unterschriften 1**
Unterschriften auf Stufe 1 werden beim Erstellen einer neuen Version automatisch wieder gelöscht.
- **Löschen von Unterschriften 2**
Unterschriften auf Stufe 2 können durch den dazu berechtigten Anwender wieder gelöscht werden.
- **Unterschriftsoptionen**
Die Optionen für Elektronische Unterschriften werden auf der Registerkarte Unterschriften im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** eingestellt.

Bestimmungen auf Stufe 1 unterschreiben

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Unterschreiben, Unterschrift 1...** öffnet sich das Fenster **Unterschrift Stufe 1** zum Unterschreiben der ausgewählten Bestimmung auf Stufe 1. Bestimmungen können mehrmals auf dieser Stufe unterschrieben werden.

Hinweis

Bestimmungen, die auf Stufe 1 unterschrieben wurden, können nachbearbeitet und gelöscht werden. Wird die geänderte Bestimmung als neue Bestimmungsversion gespeichert, werden aber alle Unterschriften automatisch gelöscht, d.h. die Bestimmung muss wieder neu unterschrieben werden.

Info

In diesem Feld werden Informationen zum Unterschreiben und Löschen von Unterschriften angezeigt. Möglich sind die folgenden Meldungen:

Unterschrift möglich

Die ausgewählte Bestimmung kann unterschrieben werden.

Unterschrift 1 nicht möglich (Unterschrift 2 vorhanden)

Die ausgewählte Bestimmung kann nicht mehr auf Stufe 1 unterschrieben werden, da sie bereits auf Stufe 2 unterschrieben wurde.

Unterschrift nicht möglich (Zugriff durch anderen Client)

Die ausgewählte Bestimmung kann nicht unterschrieben werden, da sie bereits auf einem anderen Client zum Unterschreiben markiert ist.

Anwender

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Passwort

Eingabe des Passwortes.

Begründung

Auswahl aus Standardbegründungen

Auswahl aus den im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** definierten Standardbegründungen für die Kategorie **Unterschrift Stufe 1**.

Kommentar

1000 Zeichen

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Unterschreiben

Bestimmung unterschreiben. Das Fenster bleibt geöffnet.

Hinweis

Bestimmungen können nur auf Stufe 1 unterschrieben werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehört, welche die entsprechende Berechtigung dazu hat (siehe Anwenderverwaltung/Anwendergruppe/Unterschriften).

Bestimmungen auf Stufe 2 unterschreiben

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Unterschreiben, Unterschrift 2...** öffnet sich das Fenster **Unterschrift Stufe 2** zum Unterschreiben der ausgewählten Bestimmung auf Stufe 2. Bestimmungen können mehrmals auf dieser Stufe unterschrieben werden.

Hinweis

*Bestimmung, die auf Stufe 2 unterschrieben wurden, sind **gesperrt**, d.h. sie können weder nachbearbeitet noch gelöscht werden. Um solche Bestimmungen wieder bearbeiten zu können, müssen zuerst die Unterschriften auf Stufe 2 gelöscht werden (siehe Unterschrift 2 löschen).*

Info

In diesem Feld werden Informationen zum Unterschreiben und Löschen von Unterschriften angezeigt. Möglich sind die folgenden Meldungen:

Unterschrift möglich

Die ausgewählte Bestimmung kann unterschrieben werden.

Unterschrift 2 nicht möglich (Unterschrift 1 fehlt)

Die ausgewählte Bestimmung kann nicht auf Stufe 2 unterschrieben werden, da sie auf Stufe 2 noch nicht unterschrieben wurde.

Unterschrift nicht möglich (Zugriff durch anderen Client)

Die ausgewählte Bestimmung kann nicht unterschrieben werden, da sie bereits auf einem anderen Client zum Unterschreiben markiert ist.

Anwender

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Passwort

Eingabe des Passwortes.

Begründung

Auswahl aus Standardbegründungen

Auswahl aus den im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** definierten Standardbegründungen für die Kategorie **Unterschrift Stufe 2**.

Kommentar

1000 Zeichen

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Unterschreiben


Bestimmung unterschreiben. Das Fenster bleibt geöffnet.

Hinweis

Bestimmungen können nur auf Stufe 2 unterschrieben werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehört, welche die entsprechende Berechtigung dazu hat (siehe Anwenderverwaltung/Anwendergruppe/Unterschriften).

Bestimmungsunterschriften anzeigen

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Unterschreiben, Unterschriften anzeigen...** öffnet sich das Fenster **Unterschriften - Bestimmung 'Bestimmungs-ID'** mit einer Tabelle, in der Informationen zu sämtlichen Unterschriften für die ausgewählte Bestimmung angezeigt werden.

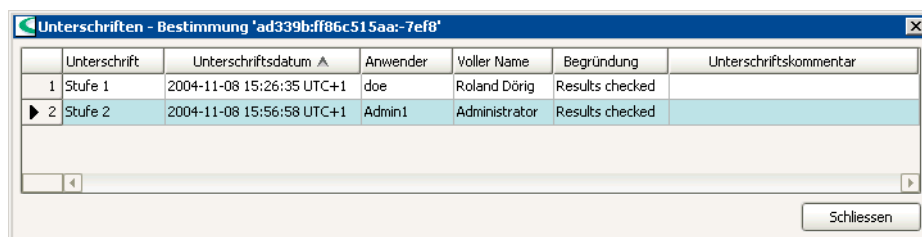

	Unterschrift	Unterschriftsdatum ▲	Anwender	Voller Name	Begründung	Unterschriftskommentar
1	Stufe 1	2004-11-08 15:26:35 UTC+1	doe	Roland Dörig	Results checked	
▶ 2	Stufe 2	2004-11-08 15:56:58 UTC+1	Admin1	Administrator	Results checked	

Schliessen

Unterschrift

Anzeige, auf welcher Stufe die Bestimmung unterschrieben wurde (**Stufe 1** oder **Stufe 2**).

Unterschriftsdatum

Datum und Zeitpunkt, an dem die Bestimmung unterschrieben wurde.

Anwender

Kurzname des Anwenders, welcher die Bestimmung unterschrieben hat.

Voller Name

Voller Name des Anwenders, welcher die Bestimmung unterschrieben hat.

Begründung

Begründung zur Unterschrift.

Unterschriftskommentar

Kommentar zur Unterschrift.

Unterschriften 2 für Bestimmungen löschen

Mit dem Menüpunkt **Datenbank, Unterschreiben, Unterschriften 2 löschen...** öffnet sich das Fenster **Unterschriften Stufe 2 löschen** zum Löschen aller Unterschriften auf Stufe 2 für die ausgewählte Bestimmung.

Anwender

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Passwort

Eingabe des Passwortes.

Begründung

Auswahl aus Standardbegründungen

Auswahl aus den im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** definierten Standardbegründungen für die Kategorie **Unterschrift Stufe 2**.

Kommentar

1000 Zeichen

Eingabe eines Kommentars zum Löschen der Unterschriften 2.

Unterschriften 2 löschen.

Hinweis

Unterschriften 2 können nur gelöscht werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehört, welche die entsprechende Berechtigung dazu hat (siehe Anwenderverwaltung/Anwendergruppe/Unterschriften).

Bestimmungen exportieren

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Exportieren...** im Programmfenster **Datenbank** öffnet sich das Dialogfenster **Bestimmungen exportieren**.

Auswahl

[Alle ausgewählten Datensätze]

Es werden alle Bestimmungen exportiert, die in der Bestimmungstabelle ausgewählt (markiert) sind.

Alle gefilterten Datensätze

Es werden alle Bestimmungen aus der ganzen Bestimmungstabelle exportiert, die dem eingestellten Filter entsprechen.

Exportvorlage

Auswahl der Exportvorlage

Auswahl der Exportvorlage für den Datenexport.

Bestimmungen importieren

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Importieren...** im Programmfenster **Datenbank** öffnet sich das Dialogfenster **Bestimmungen importieren**, in dem die zu importie-

renden Bestimmungen ausgewählt werden müssen. Diese Bestimmungen werden anschliessend in die geöffnete Datenbank importiert.

Hinweis

Exportierte Bestimmungen können nur im Dateiformat ***.mdet** importiert werden.

Bestimmungen löschen

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Löschen** werden die ausgewählten Bestimmungen nach der Bestätigungabfrage gelöscht.

Hinweis


Ist eine Datenbank gleichzeitig auf mehreren Clients geöffnet und werden Bestimmungen auf einem Client gelöscht, so werden diese auf den anderen Clients in der Bestimmungstabelle immer noch angezeigt, bis die Tabelle aktualisiert wird. Sämtliche Felder dieser Bestimmungen haben aber den Eintrag **gelöscht**.

Hinweis

Ist die Option **Kommentar bei Änderung von Bestimmungen** in den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, so erscheint vor der Speicherung das Fenster **Änderungskommentar Bestimmung**.

Bestimmungsübersicht drucken

Mit dem Menüpunkt **Datei, Drucken, Bestimmungsübersicht...** im Programmfenster **Datenbank** öffnet sich das Dialogfenster **Bestimmungsübersicht drucken (PDF)**.

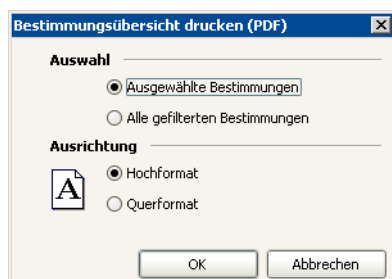

Auswahl

Ausgewählte Bestimmungen

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, werden die in der Bestimmungstabelle ausgewählten (markierten) Bestimmungen ausgegeben.

Alle gefilterten Bestimmungen

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, werden sämtliche Bestimmungen aus der Bestimmungstabelle ausgegeben, welche die Filterbedingung erfüllen.

Ausrichtung

Hochformat

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, wird die Bestimmungstabelle im Hochformat ausgegeben.

Querformat

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, wird die Bestimmungstabelle im Querformat ausgegeben.

OK

Die Bestimmungstabelle wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

Bestimmungsreport drucken

Mit dem Menüpunkt **Datei, Drucken, Report** im Programmfenster **Datenbank** öffnet sich das Dialogfenster **Reportausgabe**.

Auswahl

Ausgewählte Bestimmungen

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, werden Reports für die in der Bestimmungstabelle ausgewählten (markierten) Bestimmungen ausgegeben.

Alle gefilterten Bestimmungen

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, werden Reports für sämtliche Bestimmungen aus der Bestimmungstabelle ausgegeben, welche die Filterbedingung erfüllen.

Reporttyp

Originalreport(s)

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, werden die während der Bestimmung ausgegebenen Reports auf das unten definierte **Ausgabeziel** ausgegeben.

Reportvorlage

ein, [aus]

Auswahl der Reportvorlagen

Ist diese Option ausgewählt, werden Reports gemäß der ausgewählten Reportvorlage auf das unten definierte **Ausgabeziel** ausgegeben.

Ausgabeziel

Drucker

[ein], aus

Auswahl des Druckers

Ist diese Option eingeschaltet, werden die Reports auf den ausgewählten Drucker ausgegeben.

PDF-Datei

ein, [aus]


Ist diese Option eingeschaltet, werden die Reports als PDF-Dateien unter dem eingegebenen Dateinamen ausgegeben.

Hinweis

Werden mehrere Reports gleichzeitig als PDF-Datei ausgegeben, wird dem Dateinamen automatisch ein Index angehängt.

Bestimmungs-Methode anzeigen

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Methode anzeigen...** oder dem Symbol  öffnet sich das Dialogfenster **Bestimmungsmethode 'Methodenname'**, in dem die für die ausgewählte Bestimmung verwendete Methode mit ihren Spuren und Befehlen angezeigt wird.

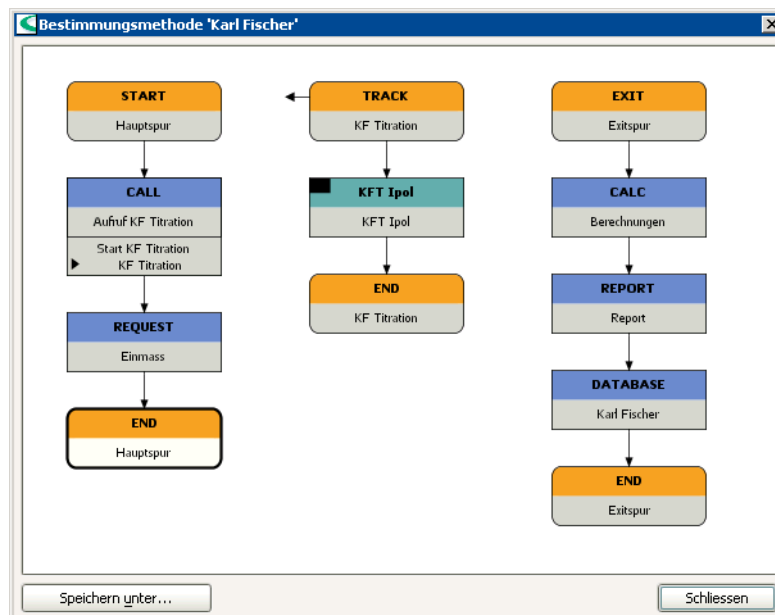

Befehlseigenschaften anzeigen

Mit einem Doppelklick auf einen Befehl oder dem kontextsensitiven Menüpunkt **Eigenschaften** wird das Eigenschaftsfenster des entsprechenden Befehls geöffnet, in dem die Parameter angezeigt werden.

Zoom

Standardmässig wird die Bestimmungsmethode so dargestellt, dass alle Spuren vollständig angezeigt werden. Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Zoom** können die folgenden Zoomstufen für die Anzeige der Methode ausgewählt werden:

200 %

Ansicht auf 200 % vergrößern.

150 %

Ansicht auf 150 % vergrößern.

100 %

Ansicht auf 100 % einstellen.

75 %

Ansicht auf 75 % verkleinern.

50 %

Ansicht auf 50 % verkleinern.

25 %

Ansicht auf 25% verkleinern.

Auf Breite

Ansicht auf Fensterbreite anpassen.

Auf Höhe

Ansicht auf Fensterhöhe anpassen.

[Einpassen]

Ansicht auf Fensterbreite und -höhe anpassen.

Methode speichern

Speichern unter...

Mit dieser Schaltfläche kann die Bestimmungsmethode in einer Methoden-
gruppe gespeichert werden. Dabei wird das Fenster **Methode speichern** ge-
öffnet, in dem die Methodengruppe ausgewählt und ein Methoden-
name eingegeben oder ausgewählt werden kann.

Bestimmungs-History anzeigen

History-Ansicht ein-/ausschalten

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, History anzeigen...** oder dem Symbol  wer-
den in der Bestimmungstabelle nur noch die aktuell fokussierte Bestimmung so-
wie sämtliche zu dieser Bestimmung gehörenden früheren Bestimmungsversio-
nen angezeigt.

Wird die History-Ansicht mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, History anzeigen...**
oder dem Symbol  wieder ausgeschaltet, erscheint wieder die ursprüngliche
Auswahl der Bestimmungen in der Bestimmungstabelle.


Alte Version aktuell machen

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Aktuell machen** oder dem Symbol  wird die
in der Tabelle ausgewählte Bestimmungsversion wieder zur aktuellen Bestim-
mungsversion gemacht. Dabei wird eine neue Bestimmung mit einer um **+1** ge-
genüber der letzten gespeicherten Version erhöhten Versionsnummer erzeugt.

Kalibrierkurve anzeigen

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Kalibrierkurve anzeigen...** oder dem Symbol  werden Kalibrierkurve und Kalibrierdaten zur ausgewählten Bestimmung im Dia-
logfenster **Kalibrierkurve** angezeigt.

Kalibrierkurve für CAL LOOP pH

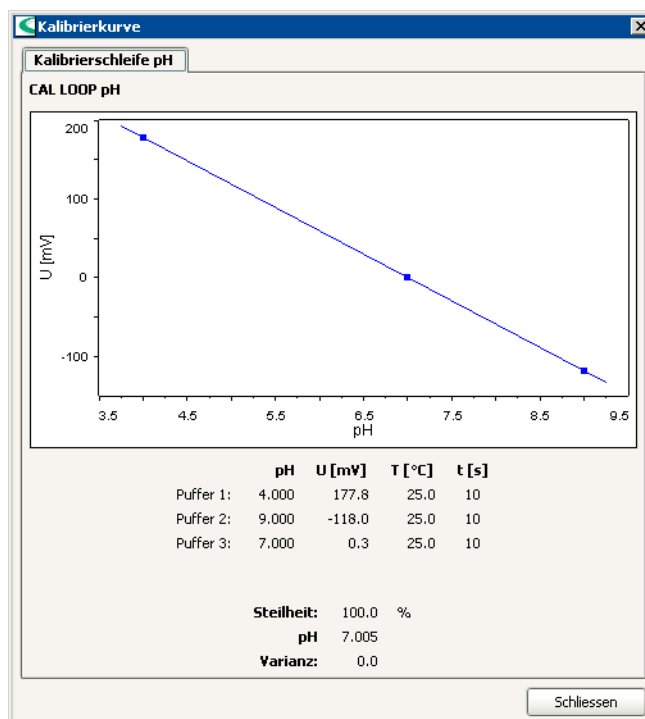

Im Dialogfenster **Kalibrierkurve** werden für jeden Befehl **CAL LOOP pH** auf einer mit dem Befehlsnamen bezeichneten Registerkarte Kalibrierkurve und Kalibrierdaten angezeigt. Der Befehlstyp wird oberhalb der Kalibrierkurve angezeigt. In der Kurvenanzeige werden die Messwerte und die mit diesen Messwerten berechnete Gerade eingezeichnet. Darunter werden die einzelnen Messwerte und die Resultate für **Steilheit**, **E(0)** und **Varianz** aufgeführt.

Kalibrierkurve für CAL LOOP Conc


Im Dialogfenster **Kalibrierkurve** werden für jeden Befehl **CAL LOOP Conc** auf einer mit dem Befehlsnamen bezeichneten Registerkarte Kalibrierkurve und Kalibrierdaten angezeigt. Der Befehlstyp wird oberhalb der Kalibrierkurve angezeigt. In der Kurvenanzeige werden die Messwerte und die mit diesen Messwerten berechnete Gerade eingezeichnet. Darunter werden die einzelnen Messwerte und die Resultate für **Steilheit**, **E(0)**, **c(Blindwert)** und **Varianz** aufgeführt.

Hinweis

Kalibrierkurven können nicht direkt aus dem Dialogfenster **Kalibrierkurve** ausgedruckt werden. Verwenden Sie dafür einen Report mit einer Reportvorlage, in welcher der Fixreport **Kalibrierkurve** enthalten ist.

Kontrollkarte

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Kontrollkarte...** oder dem Symbol  öffnet sich das Dialogfenster **Kontrollkarte**, in dem für die ausgewählten Bestimmungen eine Kontrollkarte inklusive statistischer Auswertung (Mittelwert, Anzahl Bestimmungen, absolute und relative Standardabweichung gemäss geladener Vorlage) angezeigt werden.

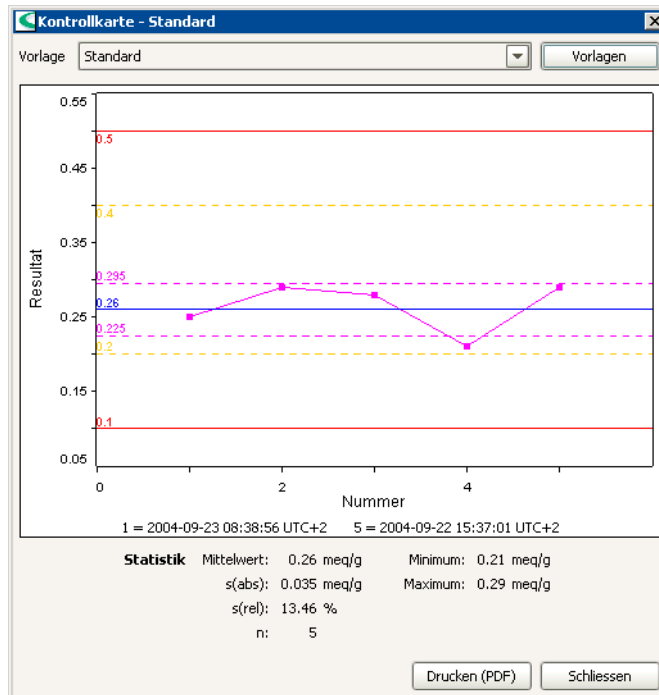

Vorlage

[Standard], 'Vorlagenname'

Auswahl der gespeicherten Vorlage für die Anzeige von Kontrollkarten. Beim Öffnen des Dialogfensters wird die zuletzt geladene Vorlage geladen. Wird eine neue Vorlage ausgewählt, wird die Anzeige automatisch aktualisiert.



Öffnen des Dialogfensters **Vorlagen für Kontrollkarten verwalten**.

Grafische Darstellung

Anzeige der Messwerte sowie von Warn- und Eingreifgrenzen und Statistikwerten gemäss den Einstellungen der gewählten Vorlage. Wird mit dem Cursor auf einen Punkt gefahren, erscheinen Nummer, Datum und Wert als Tooltip. Als Legende werden für den ersten und letzten Punkt Datum und Zeit angezeigt.



Öffnen des Dialogfensters **Kontrollkarte drucken (PDF)**, in dem der Inhalt der Kontrollkarte als PDF-Datei im gewünschten Format ausgegeben werden kann.



Hochformat

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, wird die Kontrollkarte im Hochformat ausgegeben.

Querformat

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, wird die Kontrollkarte im Querformat ausgegeben.

Auf Seitenbreite anpassen

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Ausdruck auf die Seitenbreite angepasst.

Kommentar

1000 Zeichen


Möglichkeit zur Eingabe eines Kommentars zur Kontrollkarte, der mit der Kontrollkarte ausgegeben wird.



Die Kontrollkarte wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

Kurven überlagern

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen, Kurven überlagern...** oder dem Symbol  öffnet sich das Dialogfenster **Kurven überlagern**, in dem die überlagerten Kurven der ausgewählten Bestimmungen gemäss geladener Vorlage angezeigt werden.

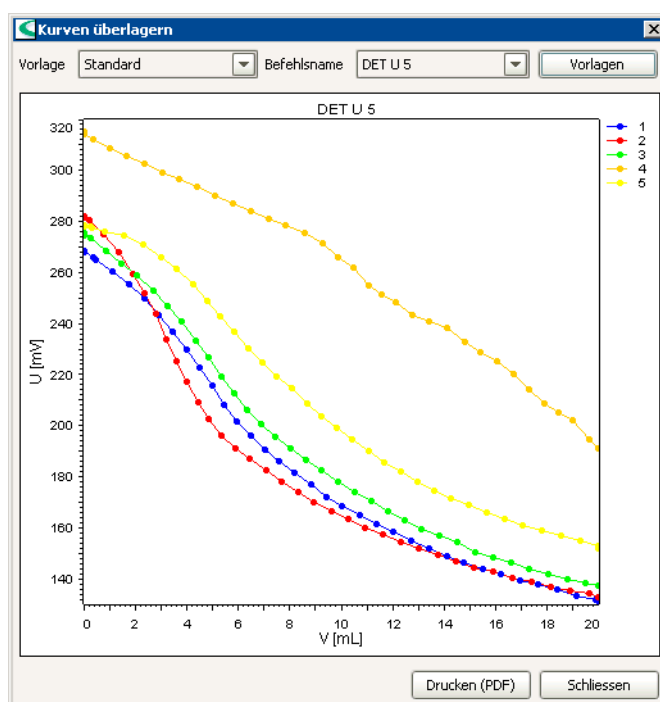

Vorlage

[Standard], 'Vorlagenname'

Auswahl der gespeicherten Vorlage für die Anzeige von überlagerten Kurven. Beim Öffnen des Dialogfensters wird die zuletzt geladene Vorlage geladen. Wird eine neue Vorlage ausgewählt, wird die Anzeige automatisch aktualisiert.

Hinweis

In der Vorlage ist der **Befehlstyp** definiert, für den eine Überlagerung von Kurven möglich ist. Kurven aus den ausgewählten Bestimmungen können nur überlagert werden, wenn die Bestimmungsmethode einen Befehl mit diesem **Befehlstyp** (z.B. **DET**) enthält.

Befehlsname

Auswahl des Befehls

Auswahl des Namens desjenigen Befehls, für den die Kurven überlagert werden sollen. Diese Auswahl ist nur nötig falls mehrere Befehle vom gleichen **Befehlstyp** in der Methode enthalten sind.

Vorlagen

Öffnen des Dialogfensters **Vorlagen für Kurvenüberlagerung verwalten**.

Grafische Darstellung

Anzeige der Kurven gemäss den Einstellungen der gewählten Vorlage. Der Befehlstyp (z.B. **DET pH**) wird in der Mitte über der Grafik angezeigt. Rechts neben der Kurve wird die Legende mit der zur Bestimmung gehörende Zeilenzahl aus der Bestimmungstabelle angezeigt

Drucken (PDF)

Öffnen des Dialogfensters **Kurven drucken (PDF)**, in dem der Inhalt der Kontrollkarte als PDF-Datei im gewünschten Format ausgegeben werden kann.



Hochformat

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, wird die Kurvengrafik im Hochformat ausgegeben.

Querformat

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, wird die Kurvengrafik im Querformat ausgegeben.

Auf Seitenbreite anpassen

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Ausdruck auf die Seitenbreite angepasst.

Kommentar

1000 Zeichen

Möglichkeit zur Eingabe eines Kommentars zu überlagerten Kurven, der mit ausgegeben wird.

OK

Die Ansicht der überlagerten Kurven wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

4.8.3 Nachbearbeiten

Allgemeines

Nachbearbeiten von Bestimmungen

Die in der Datenbank gespeicherten Bestimmungen können jederzeit nachbearbeitet werden. Dabei können Variablen, Methode, Statistik und Kurvenauswertung geändert und die Resultate neu berechnet werden. Anschliessend kann die nachbearbeitete Bestimmung als neue Version in der Datenbank gespeichert werden.

Hinweis

Bestimmungen, die auf Stufe 2 unterschrieben sind, können nicht mehr nachbearbeitet werden.

Öffnen des Nachbearbeitungsfensters

Das Nachbearbeiten von Bestimmungen, die im Unterfenster Bestimmungsübersicht ausgewählt wurden, erfolgt im eigenständigen Dialogfenster **Nachbearbeiten**, das mit **Bestimmungen**, **Nachbearbeiten** oder dem Symbol  geöffnet wird. Es enthält in der Titelleiste die üblichen Windows-Buttons zum Schliessen, Verkleinern, Maximieren und Minimieren. Standardmässig wird beim Öffnen des Fensters immer die erste der ausgewählten Bestimmungen angezeigt.


Schliessen des Nachbearbeitungsfensters

Das Dialogfenster **Nachbearbeiten** wird mit **[OK]**, **[Abrechen]** oder dem Windows-Button zum Schliessen geschlossen.

Hinweis

Das Nachbearbeitungsfenster kann nicht geschlossen werden, solange das Nachrechnen noch läuft.

Nachbearbeitungsfenster

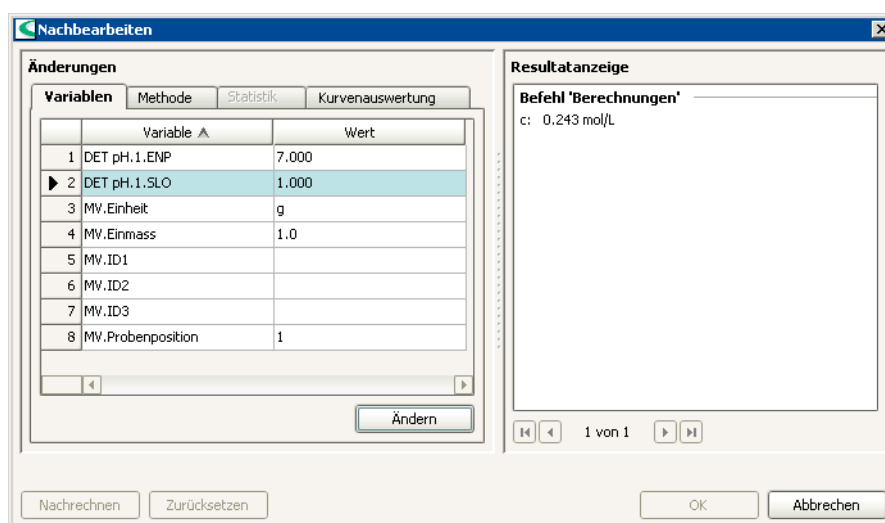

	Variable A	Wert
1	DET pH.1.ENP	7.000
2	DET pH.1.SLO	1.000
3	MV.Einheit	g
4	MV.Einmass	1.0
5	MV.ID1	
6	MV.ID2	
7	MV.ID3	
8	MV.Probenposition	1

Unterfenster

Das Dialogfenster **Nachbearbeiten** enthält die folgenden beiden Unterfenster, die durch Ziehen des Trennbalkens zwischen den Fenstern vergrößert und verkleinert werden können:

- **Änderungen**
Ändern von Variablen, Methode, Statistik, Kurvenauswertung
- **Resultatanzeige**
Anzeige der aktuellen Resultate

Funktionen

Sind im Unterfenster **Änderungen** Bestimmungen geändert worden, können folgende Funktionen ausgelöst werden:

Nachrechnen

Mit dieser Schaltfläche wird das Nachrechnen der ausgewählten Bestimmung(en) mit den im Unterfenster **Änderungen** vorgenommenen Modifikationen an Variablen, Methode, Statistik oder Kurvenauswertung ausgelöst. Während des Nachrechnens erscheint ein Fortschrittsbalken, das Nachrechnen kann dabei mit  neben dem Balken abgebrochen werden. Die Resultate dieser Nachberechnung werden automatisch im Unterfenster **Resultatanzeige** eingetragen. Diese Schaltfläche ist inaktiv, solange noch keine Änderungen vorgenommen worden sind. Nach dem Nachrechnen können weitere Daten geändert und das Nachrechnen erneut ausgelöst werden.

Zurücksetzen

Mit dieser Schaltfläche werden alle in der Nachbearbeitung vorgenommenen und noch nicht gespeicherten Änderungen zurückgesetzt und es stehen wieder die ursprünglichen Daten und Resultate zur Verfügung. Diese Schaltfläche ist inaktiv, solange noch keine Änderungen vorgenommen worden sind oder das Nachrechnen noch nicht ausgelöst wurde.

OK

Mit dieser Schaltfläche wird für jede durch die Nachbearbeitung modifizierte Bestimmung eine neue Version mit einer um +1 erhöhten Versionsnummer gespeichert und das Unterfenster **Nachbearbeiten** geschlossen. Diese Schaltfläche ist inaktiv, solange das Nachrechnen noch nicht ausgelöst wurde und wenn nicht alle ausgewählten Bestimmungen nachgerechnet werden konnten.

Abbrechen

Mit dieser Schaltfläche wird das Ergebnis der seit der letzten Speicherung vorgenommenen Nachbearbeitung nicht gespeichert und das Unterfenster **Nachbearbeiten** geschlossen. Die gleiche Funktion kann auch mit  in der rechten oberen Fensterecke ausgelöst werden.

Regeln beim Nachrechnen

Für das Nachrechnen der ausgewählten und geänderten Bestimmungen gelten folgende Regeln:

- **Anzahl Bestimmungen**
Es dürfen nicht mehr als 100 Bestimmungen (inklusive statistisch verknüpfte Bestimmungen) für das Nachrechnen ausgewählt werden.
- **Statistisch verknüpfte Bestimmungen**
Wurden für das Nachbearbeiten Bestimmungen ausgewählt, die durch die Statistik mit anderen, nicht ausgewählten Bestimmungen verknüpft sind, so werden diese Bestimmungen beim Speichern automatisch ebenfalls nachgerechnet und als neue Versionen gespeichert. Bestimmungen, die statistisch miteinander verknüpft sind, müssen beim Nachrechnen immer in der gleichen Reihenfolge nachgerechnet werden, wie sie aufgenommen wurden. Wird an einer Bestimmung keine Veränderung vorgenommen, so behält die Bestimmung ihren ursprünglichen Bestimmungsstatus (also **original** für nicht modifizierte Bestimmungen).
- **Starttest**
Beim Starttest werden sämtliche Geräte-Tests und Geräte-Überwachungen ignoriert.
- **Spezialspuren**
Beim Nachrechnen laufen Seriostart-, Serieend- und Fehlerspuren nicht mehr ab.
- **Spuren mit "Sofort zurückmelden"**
Enthält die Methode Spuren, bei denen die Option **Sofort zurückmelden** eingeschaltet ist, so erscheint eine Warnung, da nicht mehr garantiert werden kann, dass die Methode beim Nachrechnen gleich abläuft wie bei der Bestimmung.
- **Überwachungen**
Enthält die Methode Überwachungen von Variablen und Resultaten, werden allfällige Meldungen angezeigt und im Report vermerkt, aber keine E-Mails verschickt oder Signaltöne erzeugt. Ist eine der beiden Aktionen **Bestimmung abbrechen** oder **Bestimmung und Serie abbrechen** eingeschaltet, wird das Nachrechnen abgebrochen.
- **Titrier- und Messbefehle**
Bei DET, MET, SET, KFT, KFC, MEAS, CAL MEAS werden nur die Auswertungen mit den vorhandenen Daten neu berechnet, alle anderen Parameter werden ignoriert. Bei datenerzeugenden Befehlen, die zwar bei der Bestimmung ausgeführt wurden, aber beim Nachrechnen nicht mehr durchlaufen werden, werden alle vorhandenen Werte gelöscht. Bei datenerzeugenden Befehlen, die erst beim Nachrechnen erstmals ausgeführt werden, wird das Nachrechnen abgebrochen.
- **Warte- und Timeoutzeiten**
Sämtliche Warte- und Timeoutzeiten von Befehlen werden beim Nachrechnen auf **0** gesetzt.
- **Nicht ausgeführte Befehle**
Die Befehle REPORT, REQUEST, WAIT, RECEIVE, SEND, TRANSFER, STIR, SCAN, CTRL, MOVE, SWING, LIFT, PUMP, RACK, HEATER, FLOW, ADD, LQH, PREP und EMPTY werden zwar durchlaufen, aber nicht mehr ausgeführt.
- **Befehlsvariablen**
Falls eine Methode Berechnungen mit Befehlsvariablen enthält, kann die Bestimmung nur dann korrekt nachgerechnet werden, wenn der DATABASE-Befehl nach den entsprechenden Befehlen durchlaufen wird.
- **Lösungsvariablen**
Werden in der Methode Titriermittel geändert, so werden die zugehörigen

gen Variablen (z.B. **Titer**, **Steilheit**) in jedem Fall (auch wenn gleichzeitig die entsprechenden Variablen unter **Variablen** geändert wurden) für das Nachrechnen aus den Konfigurationsdaten geholt und aktualisiert.

- **Titer und Common Variablen zuweisen**

Wird eine Bestimmung ohne Statistik nachgerechnet, bei der ein Titer oder eine Common Variable zugewiesen werden, erfolgt die Zuweisung erst nach Bestätigen des Nachrechnens mit **[OK]**. Wird eine Bestimmung mit Statistik nachgerechnet, bei der ein Titer oder eine Common Variable zugewiesen werden, erfolgt die Zuweisung mit den Daten der zuletzt nachgerechneten Bestimmung erst nach Bestätigen des Nachrechnens mit **[OK]**.


Änderungen

Im Unterfenster **Änderungen** des Dialogfensters **Nachbearbeiten** können Änderungen auf den folgenden 4 Registerkarten vorgenommen werden:

- **Variablen**
Änderung der in der ausgewählten Bestimmung verwendeten Variablen.
- **Methode**
Änderung der in der ausgewählten Bestimmung verwendeten Methode.
- **Statistik**
Änderung an den Statistikdaten.
- **Kurvenauswertung**
Manuelle Änderung der Kurvenauswertung.

Variablen

Hier können die in der Bestimmung verwendeten Variablen geändert werden.

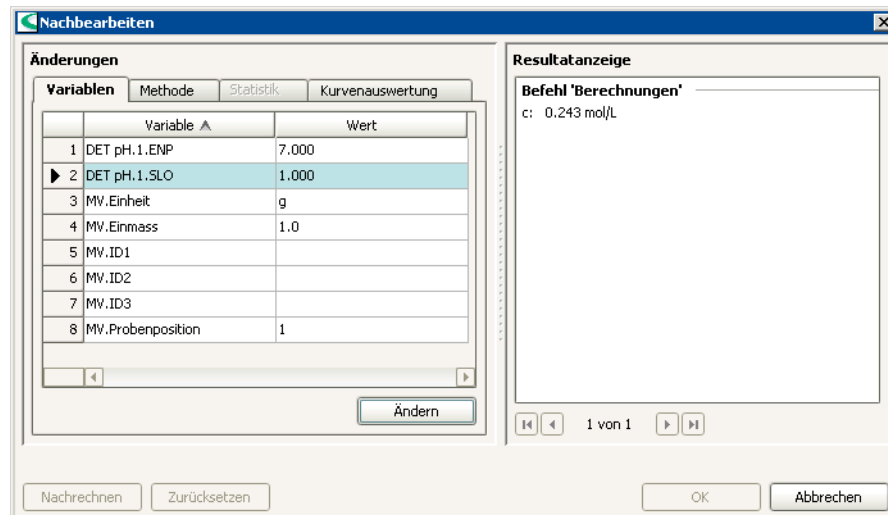

Variablentabelle

Die Variablentabelle zeigt diejenigen verwendeten Variablen an, die in allen ausgewählten Bestimmungen vorhanden sind und ist selber nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Wert**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Variable

Anzeige des Variablennamens. Angezeigt werden die im **START**-Befehl definierten Methodenvariablen (**MV.'Name'**), die in Berechnungs- und anderen


Befehlen verwendeten Common Variablen (**CV.'Name'**) sowie die Befehlsvariablen **'Name'.TITER**, **'Name'.CONC**, **'Name'.SLO**, **'Name'.ENP** und **'Name'.BLV**.

Wert

Anzeige des Variablenwertes.



Öffnen des Dialogfensters **Variable ändern** für das Ändern des Wertes einer bestehenden Variablen:

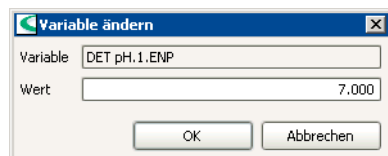

Variable

Anzeige des Variablennamens.

Wert

-1.0E+99 ... 1.0E-99, 0, 1.0E-99 ... 1.0E+99 (für **Typ = Zahl**)

100 Zeichen (für **Typ = Text**)

'Datum' (für **Typ = Datum/Zeit**)


Wert der Variablen. Bei Variablen vom Typ **Datum/Zeit** muss das Datum im Datumseingabefenster eingegeben werden.

Hinweis

*Wird eine Variable geändert, so werden mit **[Nachrechnen]** alle ausgewählten Bestimmungen mit dem neuen Wert nachgerechnet. Wird eine Variable nicht geändert, so werden beim Nachrechnen von mehreren Bestimmungen die ursprünglichen Variablenwerte verwendet (d.h. Variablen mit gleichem Namen, aber unterschiedlichen Werten werden nicht überschrieben, solange sie nicht bewusst geändert werden).*

Methode

Hier wird die verwendete Methode der fokussierten Bestimmung mit ihren Spuren und Befehlen angezeigt. Bedingung dafür ist, dass bei allen ausgewählten Bestimmungen die Methode identisch ist. Für das Nachrechnen kann die Methodenstruktur beliebig geändert werden, d.h. es stehen alle Funktionen des Methodeneditors zur Verfügung.

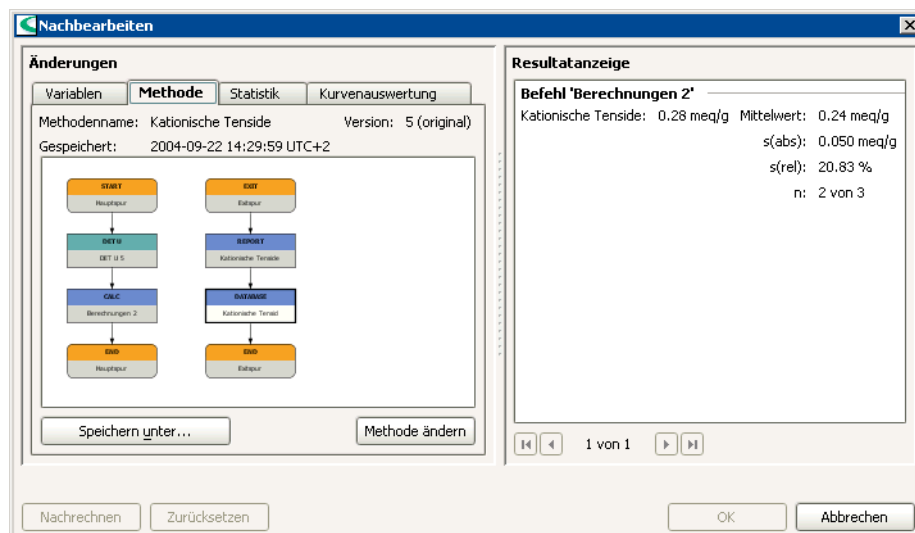

Methodenname:

Anzeige des Methodennamens.

Version:

Anzeige der Version der Methode. Bei Original-Methoden erscheint hinter der Versionsnummer der Textzusatz **(original)**. Sobald die Methode geändert wurde, erscheint hinter der Versionsnummer der Textzusatz **(modifiziert)**. Diese Information wird beim Speichern der nachgerechneten Bestimmung in den Bestimmungsdaten gespeichert.

Gespeichert:

Anzeige von Datum und Zeit der Speicherung der Methodenversion.

Methode ändern


Öffnet den Methodeneditor in einem separaten Dialogfenster **Methodeneditor**. Dort können sowohl Parameter von vorhandenen Befehlen geändert als auch Befehle und Spuren eingefügt und gelöscht werden, die geänderte Methode kann aber nicht direkt dort gespeichert werden. Wird das Dialogfenster mit **[OK]** geschlossen, wird die Methode geprüft. Danach erscheint die geänderte Methode auf der Registerkarte **Methode** mit dem Zusatz **(modifiziert)**. Diese geänderte Methode wird mit **[Nachrechnen]** auf die ausgewählten Bestimmungen angewendet und kann mit **[Speichern unter]** jederzeit gespeichert werden.

Speichern unter...

Geänderte Methode unter dem gleichen oder unter einem neuen Namen speichern. Wird die geänderte Methode unter dem Namen einer bestehenden Methode gespeichert, werden alle frühere Methodenversionen gelöscht und es entsteht eine neue Version mit der Nummer **1**.

Statistik

Hier können Einzelresultate für die Statistikberechnung nachträglich ein- und ausgeschaltet werden.

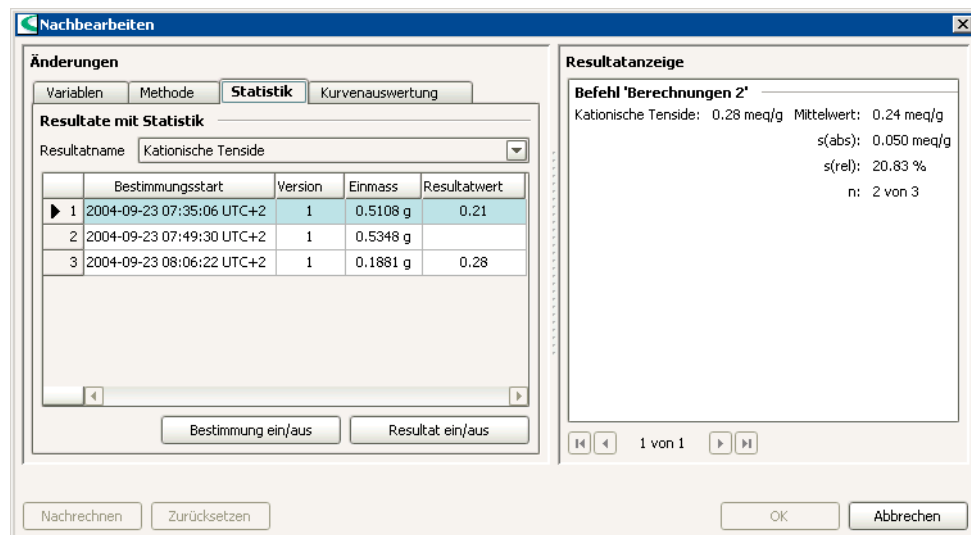

Hinweis

Die Registerkarte **Statistik** wird nur dann angezeigt, wenn die letzte Bestimmung (und nur diese) aus einem Satz von Bestimmungen ausgewählt ist, welche aufgrund der in der Methode definierten Statistik zusammengehören.

Resultate mit Statistik

Resultatname

Resultatname

Auswahl des statistisch ausgewerteten Resultats anhand des Resultatnamens, für das die Einzelresultate aller Bestimmungen angezeigt werden.

Tabelle der Einzelresultate

Für das oben ausgewählte Resultat werden folgende Daten für die einzelnen Bestimmungen angezeigt:

Bestimmungsstart

Anzeige von Datum und Zeit, an dem die Bestimmung gestartet wurde.

Version

Anzeige der Versionsnummer der Bestimmung.

Einmass

Anzeige des Probeneinmasses.

Resultatwert

Anzeige des Resultatwertes. Die Statistikdaten (Mittelwert, Standardabweichungen, etc.) für die ausgewählte Bestimmung sind im Unterfenster **Resultatanzeige** aufgeführt.

Bestimmung ein/aus

Mit dieser Schaltfläche können sämtliche Einzelresultate für die ausgewählte Bestimmung für die Statistikberechnungen aus- bzw. eingeschaltet werden. Wird die Bestimmung ausgeschaltet, erscheint hinter allen Resultatwerten der Tabelle ein Stern (*) und die Zeile wird inaktiv (grau) dargestellt, wird sie wieder eingeschaltet, verschwinden die Sterne. Die Aktualisierung der Statistikdaten erfolgt aber immer erst mit **[Nachrechnen]**.

Resultat ein/aus


Mit dieser Schaltfläche kann das in der Tabelle ausgewählte Einzelresultat für die Statistikberechnungen aus- bzw. eingeschaltet werden. Wird das Resultat ausgeschaltet, erscheint hinter dem Resultatwert ein Stern (*), wird es wieder eingeschaltet, verschwindet der Stern. Die Aktualisierung der Statistikdaten erfolgt aber immer erst mit **[Nachrechnen]**.

Hinweis

Werden Resultate einer Bestimmung ausgeschaltet, so wird beim Nachrechnen dieser Bestimmung die Statistik für diese Resultate ausgeschaltet, d.h. es werden keine Daten mehr für Mittelwert und Standardabweichungen angezeigt. Die Bestimmungen bleiben aber statistisch miteinander verknüpft, damit die Resultate auch wieder eingeschaltet werden können.

Kurvenauswertung

Hier werden Kurven angezeigt, die manuell ausgewertet werden können.

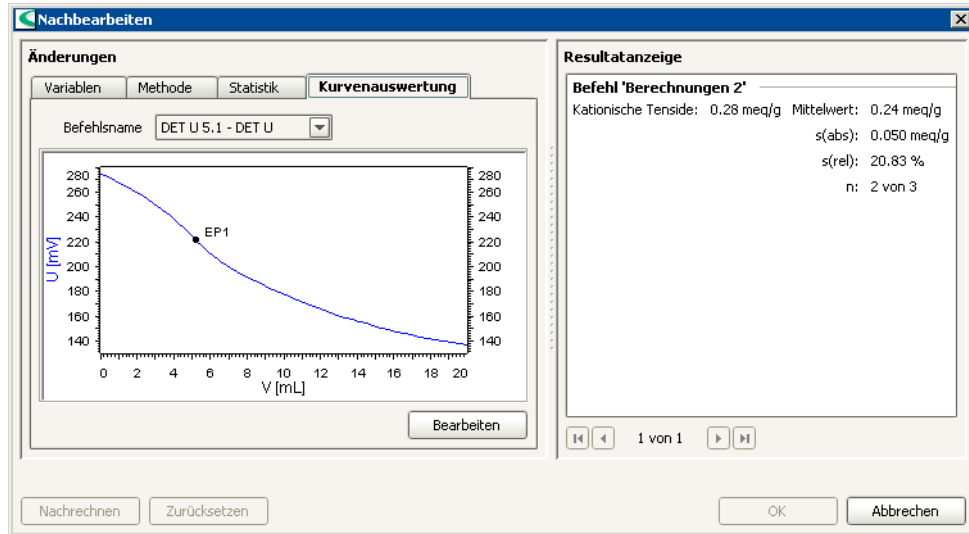

Hinweis

Die Registerkarte **Kurvenauswertung** wird nur dann angezeigt, wenn eine einzelne Bestimmung ausgewählt ist, die Kurven zum Auswerten besitzt.

Befehlsname

Befehlsname

Auswahl des Messbefehls, für den die Kurve zum Nachbearbeiten angezeigt wird.


Bearbeiten

Öffnet das Fenster **Kurvenauswertung** zum manuellen Nachbearbeiten der Kurvenauswertung.

Kurvenauswertung bearbeiten

Kurvenauswertung bearbeiten

Hier kann die Auswertung der ausgewählten Kurve manuell nachbearbeitet werden.

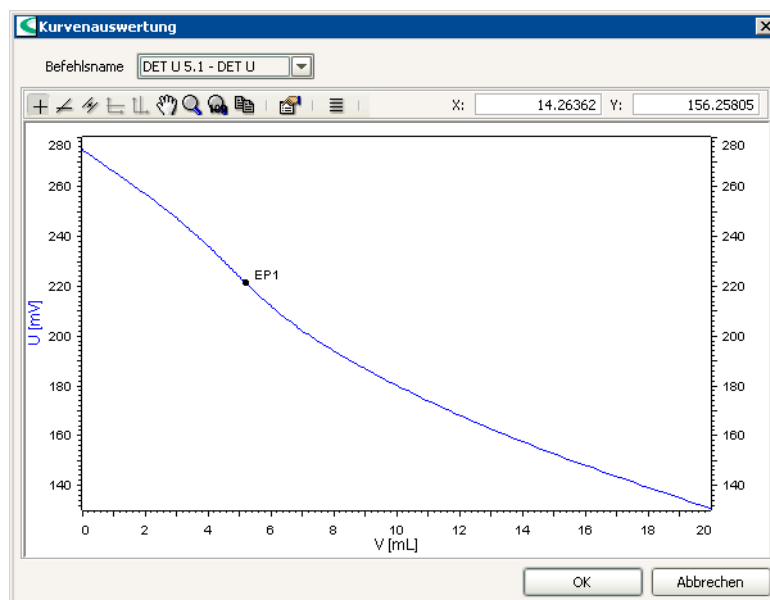

Befehlsname

Befehlsname

Auswahl des Messbefehls, für den die Kurve zum Nachbearbeiten angezeigt wird.

Symbolleiste

In der Symbolleiste über der Kurve stehen Symbole für die folgenden Funktionen für die nachträgliche Kurvenauswertung zur Verfügung:



EP manuell setzen

Durch Bewegen der Maus wird auf der Kurve ein Punkt ausgewählt. Die aktuellen X- und Y-Werte werden grafisch mit einem blauen Fadenkreuz und numerisch oberhalb der Kurve angezeigt. Durch Klicken mit der linken Maustaste wird ein neuer Endpunkt gesetzt. Diese Funktion ist beim Öffnen des Fensters **Kurvenauswertung** standardmässig aktiviert.



EP mit Schnittgeraden setzen

Durch Bewegen der Maus wird auf der Kurve ein Punkt ausgewählt, an den automatisch die Tangente angelegt wird. Durch Klicken mit der linken Maustaste wird die erste Tangente gesetzt. Anschliessend kann mit der Maus ein weiterer Punkt ausgewählt werden, an den die zweite Tangente angelegt wird. Durch Klicken mit der linken Maustaste wird die zweite Tangente gesetzt und gleichzeitig im Schnittpunkt der beiden Tangenten ein neuer Endpunkt gesetzt.



EP mit parallelen Tangenten setzen

Durch Bewegen der Maus wird auf der Kurve ein Punkt ausgewählt, an den automatisch die Tangente angelegt wird. Gleichzeitig wird auf dem andern Ast der Kurve die dazu parallele Tangente eingezeichnet. Durch Klicken mit der linken Maustaste werden die beiden Tangenten gesetzt und gleichzeitig im Schnittpunkt der Mittellinie der beiden Tangenten mit der Kurve ein neuer Endpunkt gesetzt.

Hinweis

Werden neue Endpunkte manuell oder mit Schnittgeraden- bzw. Tangentenauswertung neu gesetzt oder bestehende Endpunkte gelöscht, werden die Endpunkte immer von links nach rechts neu nummeriert. Beim Nachrechnen werden die automatischen Auswertungen generell nicht mehr auf Kurven angewendet, d.h. die in der Kurvenauswertung definierten Endpunkte bleiben bestehen.



Horizontale Hilfslinien setzen

Durch Bewegen der Maus wird in der Grafik eine horizontale Hilfslinie eingezeichnet, die durch Klicken mit der linken Maustaste gesetzt werden kann. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die Option **Auswertungslinien anzeigen** eingeschaltet ist.



Vertikale Hilfslinien setzen

Durch Bewegen der Maus wird in der Grafik eine vertikale Hilfslinie eingezeichnet, die durch Klicken mit der linken Maustaste gesetzt werden kann. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die Option **Auswertungslinien anzeigen** eingeschaltet ist.



Endpunkte und Hilfslinien löschen

Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **EP#** löschen kann der ausgewählte Endpunkt, mit **###.###** löschen kann die ausgewählte Hilfslinie gelöscht werden.



Zoomen

Durch Aufziehen eines Rechtecks mit der linken Maustaste kann der ausgewählte Bereich zoomt werden.



Zoom zurücksetzen

Die Grafik wird auf die Zoomstufe 100% zurückgesetzt.



Kopieren in Zwischenablage

Der Inhalt des Kurvenfensters wird in die Zwischenablage kopiert.



Eigenschaften für Grafikanzeige definieren

Es wird das Eigenschaftsfenster für die Kurvenanzeige geöffnet. Die pro Befehlstyp festgelegten Kurveneigenschaften werden für das Nachbearbeitungsfenster pro Client gespeichert.



EP-Liste anzeigen

Öffnen des Dialogfensters **Endpunkte**, in dem alle Endpunkte der ausgewählten Kurve in einer Tabelle angezeigt werden. Wird ein Endpunkt in der Kurve gelöscht oder hinzugefügt, wird die Tabelle automatisch aktualisiert.

Koordinatenanzeige

In der Koordinatenanzeige werden die aktuellen Koordinaten des Cursors angezeigt:


X:

X-Koordinate.

Y:

Y-Koordinate.

Endpunktliste

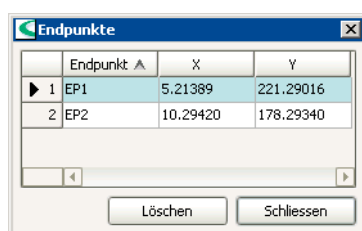

	Endpunkt ▲	X	Y
1	EP1	5.21389	221.29016
2	EP2	10.29420	178.29340

Im Dialogfenster Endpunkte werden die Endpunkte der ausgewählten Kurve tabellarisch angezeigt. Wird ein Endpunkt in der Kurve gelöscht oder hinzugefügt, wird die Tabelle automatisch aktualisiert.

Endpunkt

Bezeichnung des Endpunktes mit Nummer. Es sind folgende Bezeichnungen möglich:

EP#

Endpunkt, der mit der potentiometrischen Auswertung automatisch ermittelt oder manuell bzw. mit der Schnittgeraden- oder Tangentenmethode gesetzt wurde.

BP#

Endpunkt, der mit der automatischen Knickpunktauswertung ermittelt wurde.

FP#

Endpunkt, der mit der automatischen Fixendpunktauswertung ermittelt wurde.

X (mL)

Volumenwert in mL für Endpunkt.

Y (pH)

Messwert (pH) für Endpunkt.

Schliessen

Der in der Tabelle ausgewählte Endpunkt wird gelöscht.

Eigenschaften

Die Eigenschaften der Kurvenanzeige im Kurvenauswertungsfenster können auf den folgenden 3 Registerkarten eingestellt werden:

- **x-Achse**
Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der x-Achse.
- **y-Achse**
Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der y-Achse.
- **Optionen**
Optionen für die grafische Anzeige der Kurven.

x-Achse

Eigenschaften - Kurven 1

Befehlstyp: DET

☒ Autoskalierung

x-Achse | y-Achse | Optionen

Grösse: Volumen [mL]

Beschriftung: auto

Skalierung

Startwert: -1.0E8

Endwert: 1.0E8

OK Abbrechen Übernehmen

Befehlstyp

[**DET**], **MET**, **SET**, **KFT**, **KFC**, **MEAS**, **MEAS T/Flow**

Anzeige des Befehlstyps, für den die Kurveneigenschaften definiert werden können. Die pro Befehlstyp festgelegten Kurveneigenschaften für das Nachbearbeitungsfenster werden dabei pro Client gespeichert.

Autoskalierung

[**ein**], **aus**

Ist diese Option eingeschaltet, werden alle Achsen im Kurvenfenster automatisch skaliert. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** nicht editierbar.

Grösse

Befehlsabhängige Auswahl

Auswahl der Grösse, die auf der x-Achse dargestellt werden soll.

Beschriftung

50 Zeichen, [**auto**]

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die x-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Skalierung

Startwert

1 E-8 ... [**0.0**] ... **1 E+8**

Anfangswert für Skalierung der x-Achse.

Endwert

1 E-8 ... [**1000.0**] ... **1 E+8**

Endwert für Skalierung der x-Achse.

y-Achse

Befehlstyp

[**DET**], **MET**, **SET**, **KFT**, **KFC**, **MEAS**, **MEAS T/Flow**

Anzeige des Befehlstyps, für den die Kurveneigenschaften definiert werden können. Die pro Befehlstyp festgelegten Kurveneigenschaften für das Nachbearbeitungsfenster werden dabei pro Client gespeichert.

Autoskalierung

[**ein**], **aus**

Ist diese Option eingeschaltet, werden alle Achsen im Kurvenfenster automatisch skaliert. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** nicht editierbar.

Grösse

Befehlsabhängige Auswahl

Auswahl der Grösse, die auf der y-Achse dargestellt werden soll.

Beschriftung

50 Zeichen, [**auto**]

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Skalierung

Startwert

1 E-8 ... [**0.0**] ... **1 E+8**

Anfangswert für Skalierung der y-Achse.

Endwert

1 E-8 ... [**1000.0**] ... **1 E+8**

Endwert für Skalierung der y-Achse.

Kurve

Kurvenfarbe

Farbauswahl, [**pink**]

Auswahl der Farbe für die Kurvenlinie.

Symbol

Symbolauswahl, [**aus**]

Auswahl des Symbols für die Anzeige der Messwerte. Mit **aus** werden die Messpunkte nicht angezeigt.

Symbolfarbe

Farbauswahl, [**pink**]

Auswahl der Farbe für das Messpunktsymbol.

Glättung

[ein], aus

Ein-/Ausschalten der Glättung für Kurven.

Glättungsfaktor x-Achse

[0.01] ... 1000

Faktor für Glättung in Richtung der x-Achse.

Glättungsfaktor y-Achse

[0.01] ... 1000


Faktor für Glättung in Richtung der y-Achse.

Originalkurve mitanzeigen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird zusätzlich zur geglätteten Kurve auch die Originalkurve (gestrichelt, gleiche Farbe) angezeigt.

Optionen

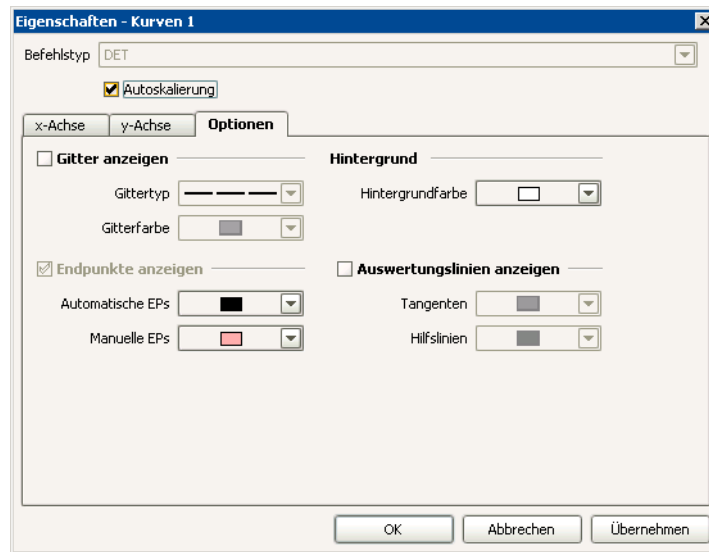

Befehlstyp

[DET], MET, SET, KFT, KFC, MEAS, MEAS T/Flow

Anzeige des Befehlstyps, für den die Kurveneigenschaften definiert werden können. Die pro Befehlstyp festgelegten Kurveneigenschaften für das Nachbearbeitungsfenster werden dabei pro Client gespeichert.

Autoskalierung

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, werden alle Achsen im Kurvenfenster automatisch skaliert. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** nicht editierbar.

Gitter anzeigen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird auf dem Hintergrund ein Gitter angezeigt.

Gittertyp

Auswahl an Linientypen

Auswahl des Typs für die Gitterlinien.

Gitterfarbe

Farbauswahl, [dunkelgrau]

Auswahl der Farbe für die Gitterlinien.

Hintergrund

Hintergrundfarbe

Farbauswahl, [weiss]

Auswahl der Farbe für den Kurvenhintergrund.

Endpunkte anzeigen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden die gefundenen Endpunkte mit dem Symbol $\blacklozenge$ auf der Kurve eingezeichnet und mit **EP#** (potentiometrische Endpunkte), **BP#** (Knickpunkt), **FP#** (Fixendpunkt), **HP** (HNP), **MI** (Minimalwert) oder **MA** (Maximalwert) beschriftet.

Automatische EPs

Farbauswahl, [schwarz]

Auswahl der Farbe für automatisch gesetzte Endpunkte.

Manuelle EPs

Farbauswahl, [hellrot]

Auswahl der Farbe für manuell gesetzte Endpunkte.

Auswertungslinien anzeigen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden die Auswertungslinien (Tangenten, Hilfslinien) angezeigt.

Tangenten

Farbauswahl, [grün]

Auswahl der Farbe für die Tangenten- und Auswertungslinien.

Hilfslinien

Farbauswahl, [blau]

Auswahl der Farbe für die Hilfslinien.

Resultatanzeige

The screenshot shows the 'Nachbearbeiten' (Post-processing) dialog box. It has two main tabs: 'Änderungen' (Changes) and 'Resultatanzeige' (Result display). The 'Änderungen' tab is active, showing a table with columns 'Variable' and 'Wert' (Value). The table contains 8 rows of variables. The 'Resultatanzeige' tab is also visible, showing the results of a calculation for 'Kationische Tenside' (Cationic Surfactants).

Variable	Wert
1 DET U 5.1.CONC	0.01
2 DET U 5.1.TITER	1.0
3 MV.Einheit	g
4 MV.Einmass	0.5108
5 MV.ID1	
6 MV.ID2	
7 MV.ID3	
8 MV.Probenposition	1

The 'Resultatanzeige' tab shows the following results:

Befehl 'Berechnungen 2'

Kationische Tenside: 0.28 meq/g Mittelwert: 0.24 meq/g

s(abs): 0.050 meq/g

s(rel): 20.83 %

n: 2 von 3

Im Unterfenster **Resultatanzeige** des Dialogfensters **Nachbearbeiten** werden die in den **CALC**-Befehlen berechneten Resultate und die dazu verwendeten Variablen angezeigt und bei jedem Nachrechnen aktualisiert.

Pro **CALC**-Befehlen werden die folgenden Elemente angezeigt:

Titel

Name des **CALC**-Befehls.

Resultat

Resultatname, Resultatwert mit definierter Anzahl Dezimalstellen, Resultateinheit.

Statistikauswertungen

Resultate der Statistikauswertung (Mittelwert, absolute und relative Standardabweichung, Anzahl für die Statistik verwendeter Messwerte und Statistiksollzähler).

Sind mehrere Bestimmungen für das Nachbearbeiten ausgewählt, kann mit den Navigationsbuttons zur Resultatanzeige der einzelnen Bestimmungen umgeschaltet werden:



Sprung zur ersten Bestimmung.



Sprung zur vorhergehenden Bestimmung.



Sprung zur nächsten Bestimmung.




Sprung zur letzten Bestimmung.

Hinweis

Wird ein Resultatwert überwacht und liegt er innerhalb der im **CALC**-Befehl definierten Grenzen, so wird er mit **grüner** Textfarbe angezeigt, liegt er ausserhalb der Grenzen, mit **roter** Textfarbe.

Änderungskommentar für Bestimmungen

Ist die Option **Kommentar bei Änderung von Bestimmungen** in den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, so erscheint vor der Übernahme der geänderten Probedaten zuerst das Fenster **Änderungskommentar Bestimmung**, in dem eine Begründung ausgewählt und ein Kommentar zur Änderung eingegeben werden muss.

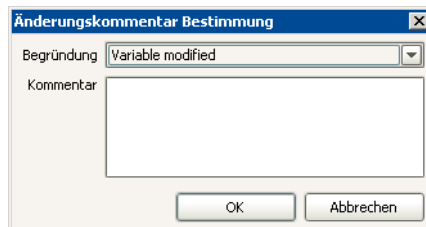

Begründung

Auswahl aus Standardtexten

Auswahl aus dem im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** definierten Standardbegründungen für die Kategorie **Änderungen Bestimmung**.

Kommentar

1000 Zeichen

Eingabe eines Kommentars zur Änderung an den Bestimmungen.

4.9 Unterfenster Informationen

4.9.1 Übersicht

Allgemeines

Im Unterfenster **Informationen** werden allgemeine Informationen zu der in der Bestimmungstabelle fokussierten Bestimmung angezeigt. Das Unterfenster kann im Programmteil **Datenbank** bei der Definition des Layouts eingeschaltet und damit sichtbar gemacht werden. Es kann beliebig vergrößert und verkleinert und auch maximiert werden.

Registerkarten

Die Informationen zur Bestimmung werden auf den folgenden 6 Registerkarten angezeigt:

- **Bestimmung**
Anzeige von allgemeinen Informationen zur Bestimmung.
- **Methode**
Anzeige von allgemeinen Informationen zur verwendeten Methode.
- **Probe**
Anzeige von allgemeinen Informationen zur verwendeten Probe.
- **Konfiguration**
Anzeige von allgemeinen Informationen zu den verwendeten Geräten, Sensoren und Common Variablen.
- **Meldungen**
Anzeige von Meldungen zur Bestimmung.
- **Bestimmungskommentar**
Anzeige des Kommentars zur Bestimmung.

4.9.2 Bestimmung

Anzeige von allgemeinen Informationen zur Bestimmung.

Informationen			
Meldungen	Bestimmungskommentar		
Bestimmung	Methode	Probe	Konfiguration
Identifikation			
Bestimmungs-ID: 11710be:10002c2fb3b:-7ed9			
Servername: Metrohmclserver			
Clientname: ch1-l			
Probennummer: 2			
Startzähler: 75			
Aufnahme			
Bestimmungsstart: 2004-11-04 16:59:07 UTC+1			
Bestimmungsdauer: 498 s			
Bestimmungsablauf: Regulär mit Bemerkungen			
Anwender (Kurzname): CH1_L			
Anwender (voller Name):			
Anmerkung:			
Programmversion: tiamo 1.0 - 25			
Lizenz-ID: 2328540103			
Status/Version			
Bestimmungsstatus: original			
Bestimmungsversion: 2			
Nachbearbeitungsdatum: 2004-11-04 17:07:35 UTC+1			
Nachbearbeitet von (Kurzname): tiamo			
Nachbearbeitet von (voller Name): Neu generierte Version für Statistik			
Änderungskommentar Bestimmung:			

Identifikation

Informationen zur Identifikation der Bestimmung.

Bestimmungs-ID:

Eindeutige und unverwechselbare Identifikation für die Bestimmung.

Servername:

Name des Servers, an dem der Client bei der Aufnahme der Bestimmung angeschlossen war.

Clientname:

Name des Clients, mit dem die Bestimmung aufgenommen wurde.

Probennummer:

Anzeige der im Ablauffenster eingetragenen **Probennummer**.

Startzähler:

Anzeige des Startzählers, der bei jedem Start einer Bestimmung um **+1** erhöht wird. Der Startzähler wird pro Client gespeichert und kann nicht zurückgesetzt werden.

Aufnahme

Informationen zur Aufnahme der Bestimmung.

Bestimmungsstart:

Datum und Zeit beim Start der Bestimmung.

Bestimmungsdauer:

Dauer der Bestimmung vom Start der Bestimmung bis zum Ende bzw. Abbruch in s.

Bestimmungsablauf:

Art, wie die Bestimmung beendet wurde:

Regulär ohne Meldungen

Die Bestimmung wurde automatisch beendet, nachdem die Methode regulär und ohne Meldungen abgelaufen war.

Regulär mit Meldungen

Die Bestimmung wurde automatisch beendet, nachdem die Methode regulär, aber mit Meldungen abgelaufen war.

Abbruch

Die Bestimmung wurde manuell mit **[Stop]**, durch ein Stoppkriterium oder mit einem **SEND**-Befehl abgebrochen.

Abbruch durch Fehler

Die Bestimmung wurde aufgrund eines Fehlers automatisch abgebrochen.

Anwender (Kurzname):

Kurzname des Anwenders, der beim Start der Bestimmung angemeldet war.

Anwender (voller Name):

Voller Name des Anwenders, der beim Start der Bestimmung angemeldet war.

Anmerkung:

Anzeige der im Ablauffenster eingetragenen **Anmerkung** zur Bestimmung.

Programmversion

Anzeige von Programmversion und Buildnummer von *tiamo*.

Lizenz-ID

Anzeige der Lizenz-Stammnummer.

Status/Version

Informationen zur Bestimmungsversion.

Bestimmungsstatus:**original**

Bestimmungsdaten unverändert.

modifiziert

Bestimmungsdaten geändert.

Bestimmungsversion:

Version der Bestimmung. Die unveränderte Originalbestimmung hat die Versionsnummer **1**, nachbearbeitete Bestimmungen haben eine Versionsnummer **>1**.

Nachbearbeitungsdatum:

Datum und Zeit der Speicherung der nachbearbeiteten Bestimmungsversion.

Nachbearbeitet von (Kurzname):

Kurzname des Anwenders, der beim Nachbearbeiten der Bestimmung angemeldet war.

Nachbearbeitet von (voller Name):

Voller Name des Anwenders, der beim Nachbearbeiten der Bestimmung angemeldet war.

Änderungsbegründung Bestimmung:

Begründung zur Änderung der Bestimmung.

Änderungskommentar Bestimmung:

Anwenderkommentar zur Änderung der Bestimmung.

Unterschrift Stufe

Informationen zu den Unterschrift auf Stufe 1 bzw. Stufe 2 in chronologischer Reihenfolge.

Unterschriftsdatum:

Datum und Zeit, an dem die Bestimmung unterschrieben wurde.

Unterschrieben von (Kurzname):

Kurzname des Anwenders, der die Bestimmung unterschrieben hat.

Unterschrieben von (voller Name):

Voller Name des Anwenders, der die Bestimmung unterschrieben hat.

Unterschriftsbegründung:

Vom Anwender ausgewählte Begründung für die Unterschrift.

Unterschriftskommentar:

Anwenderkommentar beim Unterschreiben der Bestimmung.

4.9.3 Methode

Anzeige von allgemeinen Informationen zur verwendeten Methode.

Informationen	
Meldungen	Bestimmungskommentar
Bestimmung	Methode
Probe	Konfiguration
Identifikation Methodenname: Schwefelbestimmung Methodengruppe: Hauptgruppe Methoden-ID: 11710be10002c2fb3b:-7f62 Methodenkommentar:	
Status/Version Methodenstatus: original Methodenversion: 4 Speicherdatum Methode: 2004-11-04 15:43:26 UTC+1 Methode gespeichert von (Kurzname): CH1_L Methode gespeichert von (voller Name): Änderungskommentar Methode:	

Identifikation

Informationen zur Identifikation der Methode.

Methodenname:

Name der Methode.

Methodengruppe:

Name der Methodengruppe, der die Methode zum Zeitpunkt der Bestimmung angehörte.

Methoden-ID:

Eindeutige und unverwechselbare Identifikation für die Methode.

Methodenkommentar:

Methodenkommentar (Befehlskommentar für **START**-Befehl).

Status/Version

Informationen zur Methodenversion.

Methodenstatus:

original

Bestimmungsmethode unverändert.

modifiziert

Bestimmungsmethode wurde beim Nachbearbeiten geändert.

Methodenversion:

Version der Methode.

Speicherdatum Methode:

Datum und Zeit der Speicherung der geänderten Methodenversion.

Methode gespeichert von (Kurzname):

Kurzname des Anwenders, der beim Speichern der geänderten Methode angemeldet war.

Methode gespeichert von (voller Name):

Voller Name des Anwenders, der beim Speichern der geänderten Methode angemeldet war.

Änderungsbegründung Methode:

Begründung zur Änderung der Methode.

Änderungskommentar Methode:

Anwenderkommentar zur Änderung der Methode.

Unterschrift Stufe #

Informationen zu den Unterschrift auf Stufe 1 bzw. Stufe 2 in chronologischer Reihenfolge.

Unterschriftsdatum:

Datum und Zeit, an dem die Methode unterschrieben wurde.

Unterschrieben von (Kurzname):

Kurzname des Anwenders, der die Methode unterschrieben hat.

Unterschrieben von (voller Name):

Voller Name des Anwenders, der die Methode unterschrieben hat.

Unterschriftsbegründung:


Vom Anwender ausgewählte Begründung für die Unterschrift.

Unterschriftskommentar:

Anwenderkommentar beim Unterschreiben der Methode.

4.9.4 Probe

Anzeige von allgemeinen Informationen zur verwendeten Probe.

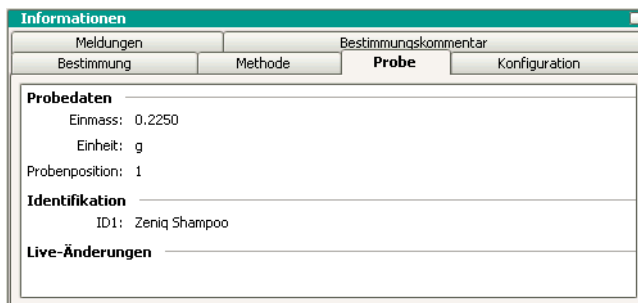

Informationen	
Meldungen	Bestimmungskommentar
Bestimmung	Methode
Probe	Konfiguration
Probedaten Einmass: 0.2250 Einheit: g Probenposition: 1	
Identifikation ID1: Zeniq Shampoo	
Live-Änderungen	

Probedaten

Informationen zur Probe.

Einmass:

Wert des Probeneinmasses.

Einheit:

Einheit des Probeneinmasses.

Probenposition:

Position der Probe auf dem Probenrack.

Identifikationen

Informationen zu den Probenidentifikationen.

ID1...ID8:

Anzeige der für die Probe eingegebenen Probenidentifikationen. Die Identifikationen werden nur angezeigt, wenn ein Wert vorhanden ist.

Hinweis

Ist für die den Probedatenvariablen **ID1 ... ID8, Einmass, Einheit, Probenposition** zugeordneten Methodenvariablen im **START-Befehl** ein anderer Name definiert worden, wird hier als Titel dieser Name und zusätzlich der Standardname in Klammern angezeigt (z.B. **Batch (ID2)**).

Live-Änderung

Informationen zur letzten Liveänderung der Probedaten.

Änderungsbegründung Probedaten:

Begründung zur Änderung der Probedaten.

Änderungskommentar Probedaten:

Anwenderkommentar zur Änderung der Probedaten.

4.9.5 Konfiguration

Anzeige von allgemeinen Informationen zu den verwendeten Geräten, Sensoren und Common Variablen.

Informationen	
Meldungen	Bestimmungskommentar
Bestimmung	Methode Probe Konfiguration
Gerät '835_2' Gerätetyp: 835 Titrande Programmversion: 5.835.0011 Geräte-Seriennummer: 02274 Messeingang: 1 ADC-Typ: 3.770.0110 ADC-Seriennummer: 4192 Temperatursensor: Pt 1000 Rührer: MSB1 Rührertyp: 804 Ti Stand Propellerrührer Rührer-Seriennummer: 1106 Dosierer: MSB2 Dosierertyp: 800 Dosierer-Seriennummer: 2367 Lösungsname: TEGO Konzentration: 0.004 mol/L Herstellungsdatum: 2003-09-10 Titer: 1.000 Datum Titerbest.: 2003-09-10 22:00:00 UTC+2 Titermethode: Wechsel-/Dosiereinheit: IDE Name: Bestellnummer: 6.3032.220 Seriennummer: 10770975 Zylindervolumen: 20 mL Zylinder-Seriennummer: 1921	
Gerät 'Mettler_AE163' Gerätetyp: Mettler Programmversion: Geräte-Seriennummer: 123	
Sensor 'pH electrode' Sensortyp: pH electrode Bestellnummer: Sensor-Seriennummer: Gerät: 835_2 Messeingang: 1	

Gerät 'Gerätename'

Informationen zum verwendeten Gerät (es werden nur die vorhandenen Geräteinformationen angezeigt).

Gerätetyp:

Typ des Gerätes.

Programmversion:

Version des Geräteprogramms.

Geräte-Seriennummer:

Seriennummer des Gerätes.

Rackname:

Name des auf dem Probenwechsler aufgesetzten Racks.

Rackcode:

Rackcode des auf dem Probenwechsler aufgesetzten Racks.

Turm:

Nummer des Turms, an dem ein Swing Head verwendet wurde.

Swing Head Typ:

Typ des am Turm angeschlossenen Swing Heads.

Swing Head Seriennummer:

Seriennummer des am Turm angeschlossenen Swing Heads.

Messeingang:

Nummer des Messeingangs.

ADC-Typ:

Typ des Analog/Digitalwandlers.

ADC-Seriennummer:

Seriennummer des Messeingangs.

Temperatursensor:

Typ des angeschlossenen Temperatursensors.

Rührer:

Rühreranschluss am Gerät.

Rührertyp:

Rührertyp.

Seriennummer:

Seriennummer des Rührers.

Dosierer:

Dosieranschluss am Gerät.

Dosierertyp:

Dosierertyp.

Dosierer-Seriennummer:

Seriennummer des Dosierers.

Lösungsname:

Name der Lösung.

Konzentration:

Konzentrationswert und -Einheit der Lösung.

Herstellungsdatum:

Datum der Lösungsherstellung.

Titer:

Titerwert und -Einheit der Lösung.

Datum Titerbest.:

Datum der Titerbestimmung.

Titermethode:

Methode, mit der der Titer bestimmt wurde.

Wechsel-/Dosiereinheit:

Typ der Wechsel- bzw. Dosiereinheit.

Name:

Bezeichnung der Wechsel- bzw. Dosiereinheit.

Bestellnummer:

Bestellnummer der Wechsel- bzw. Dosiereinheit.

Seriennummer:

Seriennummer der Wechsel- bzw. Dosiereinheit.

Zylindervolumen:

Zylindervolumen der Wechsel- bzw. Dosiereinheit.

Zylinder-Seriennummer:
Seriennummer des Zylinders.

Remotebox:
Anschluss am Gerät.

Sensor 'Sensorname'

Informationen zum verwendeten Sensor.

Sensortyp:
Typ des Sensors.

Ion:
Ion und Wertigkeit für ISE-Elektroden.

Bestellnummer:
Bestellnummer des Sensors.

Sensor-Seriennummer:
Seriennummer des Sensors.

Gerät:
Name des Gerätes, an dem der Sensor angeschlossen ist.

Messeingang:
Nummer des Messeingangs, an dem der Sensor angeschlossen ist.

Common Variable 'Name'

Informationen zur verwendeten Common Variablen.


Wert:
Wert und Einheit der Common Variablen.

Zuweisungsdatum:
Datum und Zeit der letzten Wertzuweisung.

Zuweisungsmethode:
Methode, mit der der Wert zugewiesen wurde.

4.9.6 Meldungen

Anzeige der beim Ablauf der Bestimmung erzeugten Meldungen.

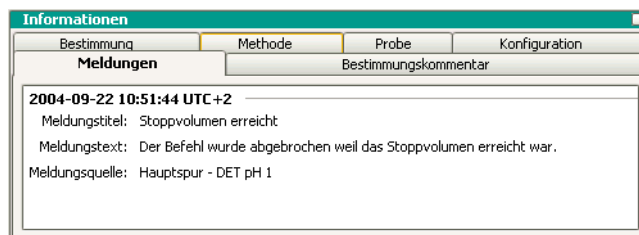

'Zeit'

Anzeige der Zeit, zu der die Meldung im Ablauf erzeugt wurde (Datum, Zeit, UTC im Format **JJJJ-MM-TT hh:mm:ss UTC.....**).

Meldungstitel:
Anzeige von Titel und Nummer zur Meldung.

Meldungstext:
Anzeige der Meldung.


Meldungsquelle:
Anzeige, woher die Meldung stammt:

Programm
Meldung, die nicht einem bestimmten Befehl zugeordnet werden kann.

Spur 'Spurname' - Befehl 'Befehlsname'
Meldung, die im Ablauf durch einen Befehl verursacht wurde.

4.9.7 Bestimmungskommentar

Anzeige des Kommentars zur Bestimmung.

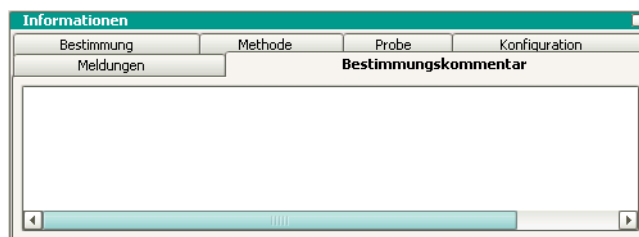

Bestimmungskommentar:

Anzeige des für die Bestimmung eingegebenen Kommentars.

4.10 Unterfenster Resultate

4.10.1 Übersicht

Allgemeines

Im Unterfenster **Resultate** werden die in den Berechnungsbefehlen berechneten Resultate und die dazu verwendeten Variablen für die in der Bestimmungstabelle fokussierte Bestimmung angezeigt. Das Unterfenster kann im Programmteil **Datenbank** bei der Definition des Layouts eingeschaltet und damit sichtbar gemacht werden. Es kann beliebig vergrößert und verkleinert und auch maximiert werden.


Registerkarten

Die Resultate zur Bestimmung werden auf den folgenden Registerkarten angezeigt:

- **Resultatübersicht**
Anzeige der Resultatübersicht für alle Berechnungsbefehle.
- **'Befehlsname'**
Anzeige der Resultate für einen einzelnen Berechnungsbefehl. Für jeden Berechnungsbefehl ist eine Registerkarte mit dem entsprechenden Befehlsnamen vorhanden.

4.10.2 Resultatübersicht

Anzeige der Resultatübersicht für alle Berechnungsbefehle.

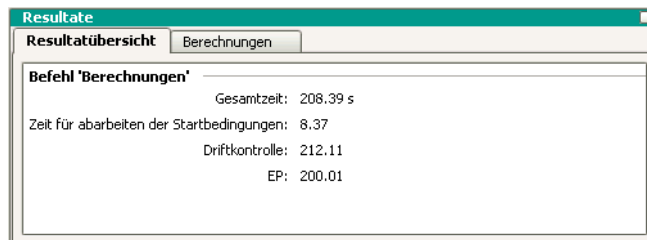

Befehl 'Befehlsname'

Name des **CALC**-Befehls, für den die Resultate angezeigt werden.

Hinweis

Es werden nur die zuletzt berechneten Resultate angezeigt. Gibt es zum Beispiel mehrere Befehle, die ein Resultat mit demselben Namen erzeugen, so werden nur bei demjenigen Befehl, der das Resultat zuletzt berechnet hat, die entsprechenden Resultatdaten angezeigt. Bei den anderen Befehlen wird nichts angezeigt.

'Resultat':

Anzeige von Resultatname, Resultatwert mit definierter Anzahl Dezimalstellen und Resultateinheit.

Hinweis

*Wird ein Resultatwert überwacht und liegt er innerhalb der im **CALC**-Befehl definierten Grenzwerte, so wird er mit **grüner** Textfarbe angezeigt, liegt er außerhalb der Grenzwerte, mit **roter** Textfarbe.*

Mittelwert:

Anzeige des Mittelwertes bei statistisch ausgewerteten Resultaten.

s(abs):

Anzeige der absoluten Standardabweichung bei statistisch ausgewerteten Resultaten.

s(rel):


Anzeige der relativen Standardabweichung bei statistisch ausgewerteten Resultaten.

n:

Anzeige der Anzahl Messungen bei statistisch ausgewerteten Resultaten.

4.10.3 Berechnungsbefehl

Anzeige der Resultate für einen einzelnen Berechnungsbefehl. Der Befehlsname wird als Titel für die Registerkarte angezeigt. Die Reihenfolge der angezeigten Resultate entspricht der im Berechnungsbefehl definierten Reihenfolge.

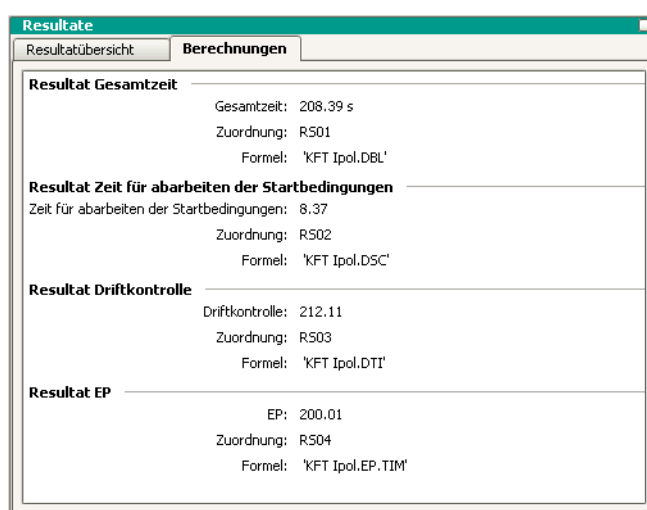
Resultat 'Resultatname'

Name des Resultates im **CALC**-Befehl, für den die Informationen angezeigt werden.

Hinweis

Es werden nur die zuletzt berechneten Resultate angezeigt. Gibt es zum Beispiel mehrere Befehle, die ein Resultat mit demselben Namen erzeugen, so werden nur bei demjenigen Befehl, der das Resultat zuletzt berechnet hat, die entsprechenden Resultatdaten angezeigt. Bei den anderen Befehlen wird nichts angezeigt.

'Resultat':

Anzeige von Resultatname, Resultatwert mit definierter Anzahl Dezimalstellen und Resultateinheit.

Hinweis

*Wird ein Resultatwert überwacht und liegt er innerhalb der im **CALC**-Befehl definierten Grenzwerte, so wird er mit **grüner** Textfarbe angezeigt, liegt er außerhalb der Grenzwerte, mit **roter** Textfarbe.*

Mittelwert:

Anzeige des Mittelwertes bei statistisch ausgewerteten Resultaten.

s(abs):

Anzeige der absoluten Standardabweichung bei statistisch ausgewerteten Resultaten.

s(rel):

Anzeige der relativen Standardabweichung bei statistisch ausgewerteten Resultaten.

n:

Anzeige der Anzahl Messungen bei statistisch ausgewerteten Resultaten.

Zuordnung:

Zuordnung des Resultats zu einer der Resultatspalten **RS01...RS25** in der Bestimmungsübersicht.

Formel:


Anzeige der für die Berechnung des Resultates verwendete Formel.

'Variablenname':

Anzeige der für die Formel verwendeten Variablen.

4.10.4 Eigenschaften

Auswahl der Elemente, die im Resultatfenster angezeigt werden sollen.

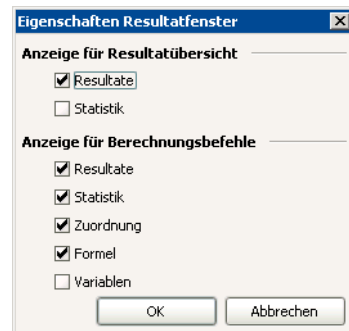

Anzeige für Resultatübersicht

Definition der Elemente, die auf der Registerkarte **Resultatübersicht** angezeigt werden sollen.

Resultate

[ein], aus

Anzeige aller Resultate.

Statistik

ein, [aus]

Anzeige der Statistikresultate.

Anzeige für Berechnungsbefehle

Definition der Elemente, die auf den Registerkarten **Berechnungsbefehl** angezeigt werden sollen.

Resultate

[ein], aus

Anzeige der Resultate, die im Berechnungsbefehl definiert sind.

Statistik

[ein], aus

Anzeige der Statistikresultate.

Zuordnung

[ein], aus

Anzeige der Zuordnung.

Formel

[ein], aus

Anzeige der Berechnungsformel.

Variablen

ein, [aus]

Anzeige der für die Formel verwendeten Variablen.

4.11 Unterfenster Kurven

4.11.1 Allgemeines

Unterfenster Kurven

Die Unterfenster **Kurven 1...5** sind Unterfenster im Programmteil **Datenbank**, in denen die von den Messbefehlen der in der Bestimmungstabelle fokussierten Bestimmung erzeugten Messpunkte in grafischer Form angezeigt werden. Beim Navigieren in der Bestimmungsübersicht werden diese Daten (mit einer bestimmten zeitlichen Verzögerung) automatisch aktualisiert.

Die Unterfenster **Kurven 1...5** können im Programmteil **Arbeitsplatz** bei der Definition des Layouts eingeschaltet und damit sichtbar gemacht werden. Sie können beliebig vergrößert und verkleinert und auch maximiert werden.

Registerkarten

Im Kurvenfenster ist für jeden Messbefehl eine Registerkarte mit dem entsprechenden Befehlsnamen vorhanden, wobei die Reihenfolge durch die Methode bestimmt wird.

Hinweis

*Wurde ein Messbefehl mehrfach ausgeführt (z.B. in Schleifen), so erscheint zusätzlich zum Befehlsnamen auch noch der entsprechende Index (z.B. **Chlorid{1}**).*

Anzeige von Kurven

Auf den Registerkarten werden die Kurven der ausgewählten Bestimmung mit den pro Fenster und pro Befehlstyp definierten Eigenschaften angezeigt. Der Befehlstyp (z.B. **DET pH**) wird über der linken y-Achse angezeigt.

Kurven können durch Aufspannen eines Bereichs mit gedrückter linker Maustaste innerhalb der Kurvenanzeige beliebig oft **gezoomt** werden. Das Zoomen kann durch einen Doppelklick auf den Grafikbereich oder mit dem kontextsensitiven Menübefehl **Alles anzeigen** wieder rückgängig gemacht werden.


Hinweis

Wird eine neue Bestimmung ausgewählt, wird immer die ganze Kurve angezeigt, d.h. der Zoombereich bleibt beim Wechseln von Bestimmungen nicht erhalten.

Kurven können mit dem kontextsensitiven Menübefehl **Grafik kopieren** in die Zwischenablage kopiert werden.

Anzeige der Messpunktliste

Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Messpunktliste...** im Kurvenfenster öffnet sich das Dialogfenster **Messpunktliste - 'Befehlsname'**, für die Anzeige der Messpunktliste der ausgewählten Kurve.

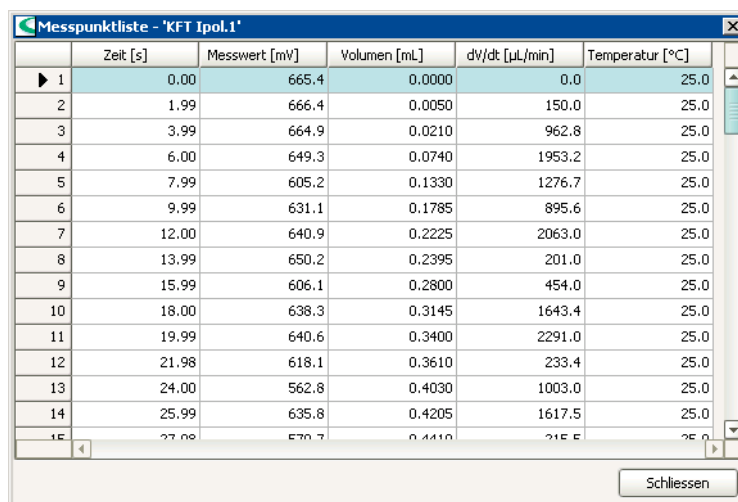

	Zeit [s]	Messwert [mV]	Volumen [mL]	dV/dt [μ L/min]	Temperatur [°C]
1	0.00	665.4	0.0000	0.0	25.0
2	1.99	666.4	0.0050	150.0	25.0
3	3.99	664.9	0.0210	962.8	25.0
4	6.00	649.3	0.0740	1953.2	25.0
5	7.99	605.2	0.1330	1276.7	25.0
6	9.99	631.1	0.1785	895.6	25.0
7	12.00	640.9	0.2225	2063.0	25.0
8	13.99	650.2	0.2395	201.0	25.0
9	15.99	606.1	0.2800	454.0	25.0
10	18.00	638.3	0.3145	1643.4	25.0
11	19.99	640.6	0.3400	2291.0	25.0
12	21.98	618.1	0.3610	233.4	25.0
13	24.00	562.8	0.4030	1003.0	25.0
14	25.99	635.8	0.4205	1617.5	25.0
15	27.00	570.7	0.4410	215.5	25.0

Die Anzeige der Messpunkte in der Tabelle kann pro Fenster und pro Befehlstyp in den Eigenschaften definiert werden.

4.11.2 Eigenschaften

Die Eigenschaften für die Anzeige von Kurven können auf den folgenden 5 Registerkarten eingestellt werden:

- **x-Achse**
Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der x-Achse.
- **y1-Achse**
Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der y1-Achse (linke y-Achse).
- **y2-Achse**
Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der y2-Achse (rechte y-Achse).
- **Optionen**
Optionen für die grafische Anzeige der Kurven.
- **Messpunktliste**
Parameter für die Anzeige der Messpunktliste.

x-Achse

Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der x-Achse.

Befehlstyp

[DET], MET, SET, KFT, KFC, MEAS, MEAS T/Flow

Auswahl des Befehlstyps, für den die Kurveneigenschaften definiert werden sollen. Die pro Befehlstyp festgelegten Kurveneigenschaften werden dabei pro Kurvenfenster und pro Client gespeichert.

Hinweis

Beim Öffnen des Dialogfensters wird standardmässig derjenige **Befehlstyp** ausgewählt, der für die im Kurvenfenster dargestellte Kurve gilt.

Autoskalierung

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, werden alle Achsen im Kurvenfenster automatisch skaliert. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** nicht editierbar.

Grösse

Befehlsabhängige Auswahl

Auswahl der Grösse, die auf der x-Achse dargestellt werden soll.

Beschriftung

50 Zeichen, [auto]

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die x-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Skalierung

Startwert

1 E-8 ... [0.0] ... 1 E+8

Anfangswert für Skalierung der x-Achse.

Endwert

1 E-8 ... [1000.0] ... 1 E+8

Endwert für Skalierung der x-Achse.

y1-Achse

Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der y1-Achse (linke y-Achse).

Befehlstyp

[DET], MET, SET, KFT, KFC, MEAS, MEAS T/Flow

Auswahl des Befehlstyps, für den die Kurveneigenschaften definiert werden sollen. Die pro Befehlstyp festgelegten Kurveneigenschaften werden dabei pro Kurvenfenster und pro Client gespeichert.

Hinweis

Beim Öffnen des Dialogfensters wird standardmässig derjenige **Befehlstyp** ausgewählt, der für die im Kurvenfenster dargestellte Kurve gilt.

Autoskalierung

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, werden alle Achsen im Kurvenfenster automatisch skaliert. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** nicht editierbar.

Grösse

Befehlsabhängige Auswahl

Auswahl der Grösse, die auf der y1-Achse dargestellt werden soll.

Beschriftung

50 Zeichen, [auto]

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y1-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Skalierung

Startwert

1 E-8 ... [0.0] ... 1 E+8

Anfangswert für Skalierung der y1-Achse.

Endwert

1 E-8 ... [1000.0] ... 1 E+8

Endwert für Skalierung der y1-Achse.

Kurve

Kurvenfarbe

Farbauswahl, [blau]

Auswahl der Farbe für die Kurvenlinie.

Symbol

Symbolauswahl, [aus]

Auswahl des Symbols für die Anzeige der Messwerte. Mit **aus** werden die Messpunkte nicht angezeigt.

Symbolfarbe

Farbauswahl, [blau]

Auswahl der Farbe für das Messpunktsymbol.

Glättung

ein, [aus]

Ein-/Ausschalten der Glättung für Kurven.

Glättungsfaktor x-Achse

[0.01] ... 1000

Faktor für Glättung in Richtung der x-Achse.

Glättungsfaktor y-Achse

[0.01] ... 1000

Faktor für Glättung in Richtung der y-Achse.


Originalkurve mitanzeigen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird zusätzlich zur geglätteten Kurve auch die Originalkurve (gestrichelt, gleiche Farbe) angezeigt.

y2-Achse

Parameter für die grafische Anzeige der überlagerten Kurven auf der y2-Achse (rechte y-Achse).

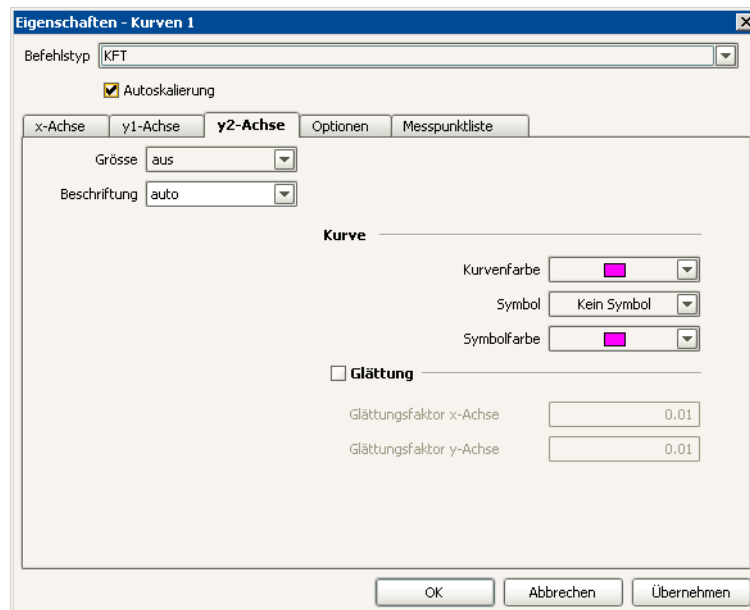

Befehlstyp

[DET], MET, SET, KFT, KFC, MEAS, MEAS T/Flow

Auswahl des Befehlstyps, für den die Kurveneigenschaften definiert werden sollen. Die pro Befehlstyp festgelegten Kurveneigenschaften werden dabei pro Kurvenfenster und pro Client gespeichert.

Hinweis

Beim Öffnen des Dialogfensters wird standardmässig derjenige **Befehlstyp** ausgewählt, der für die im Kurvenfenster dargestellte Kurve gilt.

Autoskalierung

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, werden alle Achsen im Kurvenfenster automatisch skaliert.

Grösse

Befehlsabhängige Auswahl

Auswahl der Grösse, die auf der y2-Achse dargestellt werden soll.

Beschriftung

50 Zeichen, [auto]

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y2-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Kurve

Kurvenfarbe

Farbauswahl, [pink]

Auswahl der Farbe für die Kurvenlinie.

Symbol

Symbolauswahl, [aus]

Auswahl des Symbols für die Anzeige der Messwerte. Mit **aus** werden die Messpunkte nicht angezeigt.

Symbolfarbe

Farbauswahl, [pink]

Auswahl der Farbe für das Messpunktsymbol.

Glättung

ein, [aus]

Ein-/Ausschalten der Glättung für Kurven.

Glättungsfaktor x-Achse

[0.01] ... 1000


Faktor für Glättung in Richtung der x-Achse.

Glättungsfaktor y-Achse

[0.01] ... 1000

Faktor für Glättung in Richtung der y-Achse.

Optionen

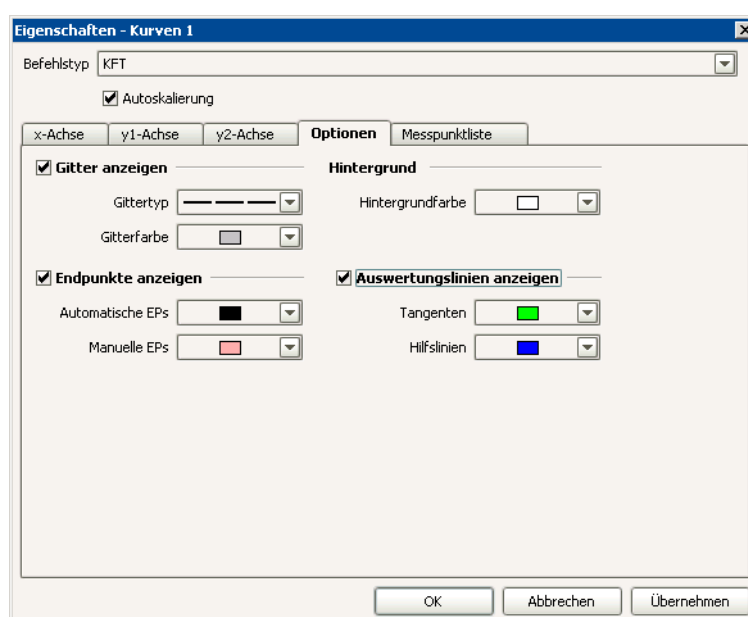

Befehlsname

Auswahl von Befehlsnamen

Name des Titrier- oder Messbefehls, von dem Kurven überlagert werden sollen. Zur Auswahl werden alle Messbefehle angeboten, die in der fokussierten Bestimmungen vorhanden sind.

Hinweis

*Kurven aus den ausgewählten Bestimmungen können nur überlagert werden, wenn die Bestimmungsmethode einen Befehl mit diesem Namen enthält und dieser Befehl zudem vom gleichen **Befehlstyp** (z.B. **DET**) ist.*

Autoskalierung

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, werden alle Achsen im Kurvenfenster automatisch skaliert.

Optionen für die grafische Anzeige der Kurven.

Gitter anzeigen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird auf dem Hintergrund ein Gitter angezeigt.

Gittertyp

Auswahl an Linientypen

Auswahl des Typs für die Gitterlinien.

Gitterfarbe

Farbauswahl, [dunkelgrau]

Auswahl der Farbe für die Gitterlinien.

Hintergrund

Hintergrundfarbe

Farbauswahl, [weiss]

Auswahl der Farbe für den Kurvenhintergrund.

Endpunkte anzeigen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden die gefundenen Endpunkte mit dem Symbol **◆** auf der Kurve eingezeichnet und mit **EP#** (potentiometrische Endpunkte), **BP#** (Knickpunkt) oder **FP#** (Fixendpunkt) beschriftet.

Automatische EP

Farbauswahl, [schwarz]

Auswahl der Farbe für automatisch gesetzte Endpunkte.

Manuelle EP

Farbauswahl, [hellrot]

Auswahl der Farbe für manuell gesetzte Endpunkte.

Auswertungslinien anzeigen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden die Auswertungslinien (Tangenten, Hilfslinien) angezeigt.

Tangenten

Farbauswahl, [grün]


Auswahl der Farbe für die Tangenten- und Auswertungslinien.

Hilfslinien

Farbauswahl, [blau]

Auswahl der Farbe für die Hilfslinien.

Messpunktliste

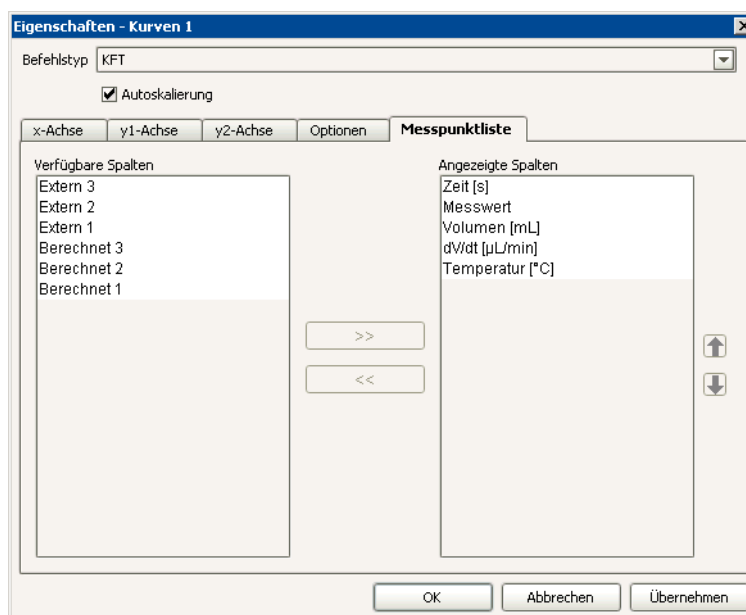

Befehlsname

Auswahl von Befehlsnamen

Name des Titrier- oder Messbefehls, von dem Kurven überlagert werden sollen. Zur Auswahl werden alle Messbefehle angeboten, die in der fokussierten Bestimmungen vorhanden sind.

Hinweis

Kurven aus den ausgewählten Bestimmungen können nur überlagert werden, wenn die Bestimmungsmethode einen Befehl mit diesem Namen enthält und dieser Befehl zudem vom gleichen **Befehlstyp** (z.B. **DET**) ist.

Autoskalierung

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, werden alle Achsen im Kurvenfenster automatisch skaliert.


Parameter für die Anzeige der Messpunktliste.

Verfügbare Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Messpunktliste angezeigt werden können.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Messpunktliste angezeigt werden.

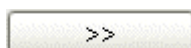

Hinzufügen der ausgewählten Spalte in die Messpunktliste .



Entfernen der ausgewählten Spalte aus der Messpunktliste .



Ändern der Reihenfolge der angezeigten Spalten durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach oben bzw. nach unten.

Kapitel 5 Methoden

5.1 Allgemeines


5.1.1 Allgemeines

Definition

Unter **Methode** versteht man in *tiamo* eine Ablaufvorschrift zur Bearbeitung einer Probe, die im Programmteil **Methode** erstellt und im Programmteil **Arbeitsplatz** gestartet werden kann.

Aufbau

Jede Methode enthält Spuren, die aus einzelnen Befehlen zusammengesetzt sind.

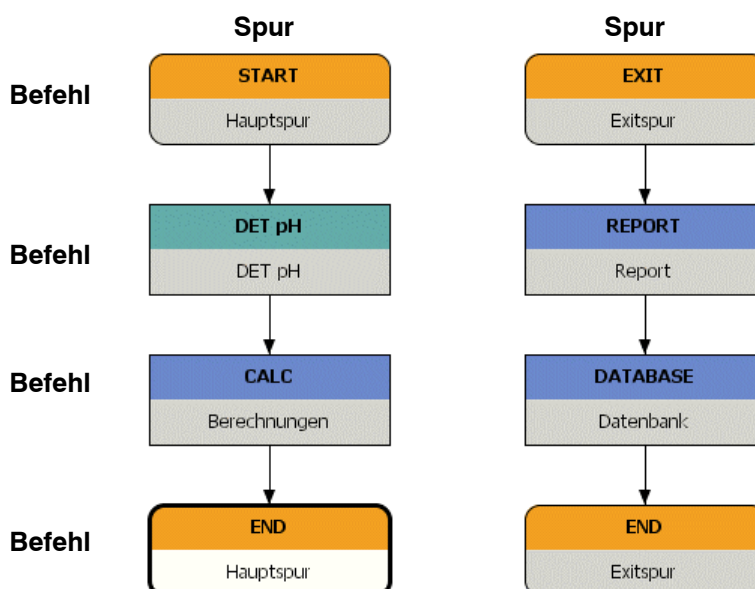

Verwaltung

Methoden sind in **Methodengruppen** organisiert und werden immer automatisch versioniert, d. h. bei jeder Speicherung einer Methode wird eine neue Version erstellt. Methoden können zusätzlich in zwei Stufen unterschrieben und gegen weitere Veränderungen gesperrt werden. Methoden sind in der Konfigurationsdatenbank abgelegt und dort für alle Clients global zugänglich.

5.1.2 Oberfläche

Methodensymbol



Durch Klicken auf das Methodensymbol in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Methode** geöffnet, gleichzeitig wird das Methodensymbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des Symbols befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell geöffneten Methoden angezeigt wird (siehe Methodenauswahl).

Elemente

Die Oberfläche des Programmteils **Methode** umfasst die folgenden Elemente:

- Methodenspezifische Menüleiste.
- Methodenspezifische Symbolleiste.
- Hauptfenster, in dem mehrere Methoden geöffnet und maximal 2 gleichzeitig angezeigt werden können.

5.1.3 Menüleiste

Die Menüleiste im Programmteil **Methode** umfasst folgende Hauptmenüpunkte:

- **Datei**
Methoden erstellen, öffnen, speichern, schliessen, testen, verwalten, drucken.
- **Bearbeiten**
Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, Löschen, Eigenschaften, Kommentar.
- **Ansicht**
Methoden anzeigen, Symbolleiste anzeigen.
- **Einfügen**
Befehl, Spur.
- **Extras**
Manuelles Bedienen der angeschlossenen Geräte.
- **Hilfe**
tiamo-Hilfe öffnen, Info anzeigen.

Menü Datei

-  **Neu...**
Neue Methode erstellen.
-  **Öffnen...**
Bestehende Methode öffnen.
-  **Speichern**
Ausgewählte Methode speichern.
- Speichern unter...**
Ausgewählte Methode unter einem neuen Namen speichern.
- Alle schliessen**
Alle geöffneten Methoden schliessen.
-  **Schliessen**
Ausgewählte Methode schliessen.
-  **Methodentest**
Ausgewählte Methode auf Plausibilität testen.
-  **Methoden verwalten...**
Methodenverwaltung öffnen.
-  **Methodengruppen...**
Verwaltung für Methodengruppen öffnen.



Drucken (PDF)

Methodenreport als PDF-Datei ausgeben.



Abmelden...

Anwender abmelden.

Beenden

Programm beenden.

1 'Methodenname'

Ausgewählte Methode öffnen.

Menü Bearbeiten



Eigenschaften...

Parameterfenster für den in der Methode ausgewählten Befehl öffnen.



Rückgängig

Die letzte Änderung an der Methode rückgängig machen.



Wiederherstellen

Wiederherstellen der rückgängig gemachten Änderung an der Methode.



Ausschneiden

Ausgewählte Elemente (Befehle, Spuren) ausschneiden und in Zwischenablage kopieren.



Kopieren

Ausgewählte Elemente (Befehle, Spuren) in Zwischenablage kopieren.



Einfügen

Inhalt der Zwischenablage (Befehle, Spuren) vor dem ausgewählten Befehl bzw. rechts neben der ausgewählten Spur einfügen.



Löschen

Ausgewählte Elemente (Befehle, Spuren) löschen.



Kommentar...

Kommentar zu ausgewähltem Befehl neu eingeben oder bearbeiten.

Menü Ansicht



Nebeneinander

Methodenfenster vertikal teilen und zwei Methoden nebeneinander anzeigen.



Untereinander

Methodenfenster horizontal teilen und zwei Methoden untereinander anzeigen.



Teilung aufheben

Teilung des Methodenfensters wieder aufheben.

Symbolleiste

Anzeige der Symbolleiste ein-/ausschalten.

Menü Einfügen



Neuer Befehl...

Neuen Befehl oberhalb des ausgewählten Befehls einfügen.



Neue Spur...

Neue Spur rechts neben der ausgewählten Spur einfügen.

Menü Extras



Manuelle Bedienung

Manuelles Bedienen der angeschlossenen Geräte.

Menü Hilfe



tiamo Hilfe

tiamo-Hilfe öffnen.

Info

Informationen zum Programm und zur Installation anzeigen.

5.1.4 Symbolleiste



Neu...

Neue Methode erstellen.



Öffnen...

Bestehende Methode öffnen.



Speichern

Ausgewählte Methode speichern.



Schliessen

Ausgewählte Methode schliessen.



Methoden verwalten...

Methodenverwaltung öffnen.



Methodengruppen...

Verwaltung für Methodengruppen öffnen.



Drucken (PDF)

Methodenreport als PDF-Datei ausgeben.



Methodentest

Ausgewählte Methode auf Plausibilität testen.



Eigenschaften...

Parameterfenster für den in der Methode ausgewählten Befehl öffnen.



Rückgängig

Die letzte Änderung an der Methode rückgängig machen.



Wiederherstellen

Wiederherstellen der rückgängig gemachten Änderung an der Methode.



Ausschneiden

Ausgewählte Elemente (Befehle, Spuren) ausschneiden und in Zwischenablage kopieren.



Kopieren

Ausgewählte Elemente (Befehle, Spuren) in Zwischenablage kopieren.



Einfügen

Inhalt der Zwischenablage (Befehle, Spuren) vor dem ausgewählten Befehl bzw. rechts neben der ausgewählten Spur einfügen.



Löschen

Ausgewählte Elemente (Befehle, Spuren) löschen.



Kommentar...

Kommentar zu ausgewähltem Befehl neu eingeben oder bearbeiten.

-  **Neuer Befehl...**
Neuen Befehl oberhalb des ausgewählten Befehls einfügen.
-  **Neue Spur...**
Neue Spur rechts neben der ausgewählten Spur einfügen.
-  **Methode zoomen**
Auswahl der Zoomstufe.
-  **Manuelle Bedienung**
Manuelles Bedienen der angeschlossenen Geräte.
-  **Nebeneinander**
Methodenfenster vertikal teilen und zwei Methoden nebeneinander anzeigen.
-  **Untereinander**
Methodenfenster horizontal teilen und zwei Methoden untereinander anzeigen.
-  **Teilung aufheben**
Teilung des Methodenfensters wieder aufheben.
-  **Abmelden...**
Anwender abmelden.
-  **tiamo Hilfe**
tiamo-Hilfe öffnen.

5.1.5 Funktionen

Im Programmteil **Methode** können folgende Funktionen ausgeführt werden:

Methodeneditor

- Methode neu erstellen
- Methode öffnen
- Methode anzeigen
- Methode bearbeiten
- Methode testen
- Methode speichern
- Methode schließen

Methoden verwalten

- Methoden verwalten
- Methode umbenennen
- Methode kopieren
- Methode verschieben
- Methode löschen
- Methode exportieren
- Methode importieren
- Methode unterschreiben
- Methoden-History anzeigen

Methodengruppen verwalten

- Methodengruppen verwalten
- Methodengruppe bearbeiten


Methodenreport drucken

- Methodenreport wählen
- Methodenablauf-Report
- Methodenparameter-Report
- Titrations- und Messparameter-Report

5.2 Methodeneditor

5.2.1 Methode neu erstellen

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei, Neu...** wird das Fenster **Neue Methode** geöffnet, in dem eine Methodenvorlage für die neue Methode ausgewählt werden kann.

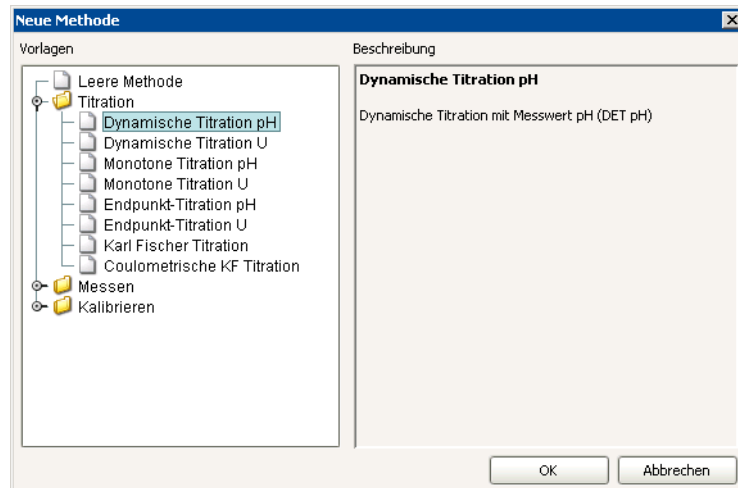

Vorlagen

Methodenvorlagen, [Leere Methode]

Auswahl einer vorbereiteten Methodenvorlage als Grundlage für das Erstellen einer neuen Methode. Mit **Leere Methode** wird eine Vorlage geladen, die nur die Befehle **START** und **END** enthält.


Beschreibung

Beschreibung zur ausgewählten Methodenvorlage.

Mit **[OK]** wird die ausgewählte Vorlage zum Bearbeiten geöffnet.

5.2.2 Methode öffnen

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei, Öffnen...** wird das Fenster **Methode öffnen** geöffnet, in dem eine der global verfügbaren Methoden ausgewählt werden kann, die geöffnet werden soll.

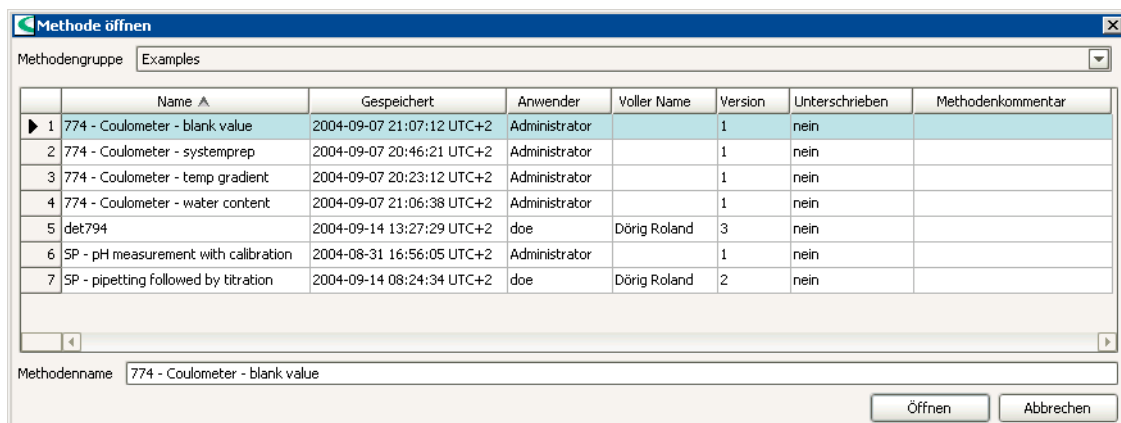

Methodengruppe

Methodengruppe

Methodengruppen, [Hauptgruppe]

Auswahl der Methodengruppe, deren Methoden in der Methodentabelle angezeigt werden sollen.

Methodengruppen

Öffnet das Fenster **Methodengruppen** (siehe *Methoden - Methodengruppen verwalten*) für die Verwaltung der Methodengruppen.

Methodentabelle

Die Methodentabelle enthält Informationen zu allen Methoden der ausgewählten Methodengruppe. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Gespeichert**, **Anwender**, **Voller Name**, **Version**, **Unterschrieben**, **Methodenkommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Methode.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Methode.

Anwender

Kurzname des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Voller Name

Voller Name des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Version

Versionsnummer der Methode.

Unterschrieben

Anzeige, ob und wie die Methode unterschrieben wurde.

nein

Die Methode wurde noch nicht unterschrieben. Sie kann zum Bearbeiten geöffnet und gelöscht werden.

Stufe 1

Die Methode wurde auf Stufe 1 elektronisch unterschrieben. Sie kann zum Bearbeiten geöffnet und gelöscht werden. Wird die Methode geändert und neu abgespeichert, so wird eine neue Version angelegt, bei der alle Unterschriften gelöscht sind.

Stufe 2

Die Methode wurde auf Stufe 2 elektronisch unterschrieben. Dadurch ist sie gesperrt und kann weder zum Bearbeiten geöffnet noch gelöscht werden.

Methodenkommentar

Kommentar zur Methode, der im Befehl **START** als Befehlskommentar eingegeben wurde.

Methode öffnen

Methodenname

50 Zeichen

Name der Methode, die geöffnet werden soll. Wird eine der Methoden in der Tabelle ausgewählt, wird der Methodenname automatisch in diesem Feld eingetragen. Er kann aber auch manuell eingegeben werden.

Öffnen

Öffnet die ausgewählte Methode im Hauptfenster anstelle der bereits geöffneten Methode. Der Methodenname wird in der Titelzeile des Programms angezeigt, die Anzahl geöffneter Methoden in der linken oberen Ecke des Methodensymbols.


Hinweis

Es können maximal 9 Methoden geöffnet, aber nur 2 gleichzeitig angezeigt werden.


5.2.3 Methode anzeigen

Auswahl der Methode im Methodensymbol


In der linken oberen Ecke des Methodensymbols wird die Anzahl geöffneter Methoden angezeigt. Sind 2 oder mehr Methoden geöffnet, können die beiden Methoden, die im Hauptfenster nebeneinander oder untereinander angezeigt werden können, mit Hilfe des Methodensymbols ausgewählt werden.

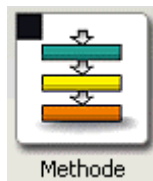


Es ist keine Methode geöffnet. Im Hauptfenster wird keine Methode angezeigt.

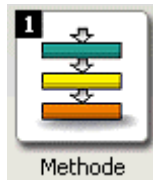

Eine Methode ist geöffnet und wird im Hauptfenster angezeigt.

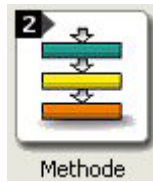

Zwei Methoden sind geöffnet. Normalerweise wird nur eine Methode im Hauptfenster angezeigt, es können aber auch zwei Methoden nebeneinander oder untereinander angezeigt werden.

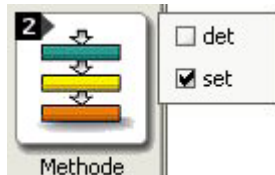

Ein Klick mit der linken oder rechten Maustaste auf das Methodensymbol öffnet ein Menü, in dem die Namen aller geöffneten Methoden angezeigt werden. Die im Hauptfenster angezeigten Methoden werden dabei mit einem Häkchen markiert. Mit einem Klick auf die gewünschte Methode wird diese anstelle der zuvor ausgewählten Methode angezeigt.

Einzelne Methode anzeigen

Standardmässig wird immer die zuletzt geöffnete Methode einzeln im Hauptfenster angezeigt. Ist die Anzeige zweier Methoden eingeschaltet, kann mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Ansicht, Teilung aufheben** wieder auf die Anzeige nur einer Methode umgeschaltet werden.

Methoden nebeneinander anzeigen

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Ansicht, Nebeneinander** werden zwei Methoden nebeneinander im Hauptfenster angezeigt.

Methoden untereinander anzeigen

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Ansicht, Untereinander** werden zwei Methoden untereinander im Hauptfenster angezeigt.

Zoom für Methoden

Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Zoom** oder dem Symbol  auf der Symbolleiste können die folgenden Zoomstufen für die Anzeige der Methode ausgewählt werden:

200 %

Ansicht auf 200 % vergrößern.

150 %

Ansicht auf 150 % vergrößern.

100 %

Ansicht auf 100 % einstellen.

75 %

Ansicht auf 75 % verkleinern.

50 %

Ansicht auf 50 % verkleinern.

25 %

Ansicht auf 25% verkleinern.

Auf Breite

Ansicht auf Fensterbreite anpassen.

Auf Höhe

Ansicht auf Fensterhöhe anpassen.

Einpassen

Ansicht auf Fensterbreite und -höhe anpassen.

5.2.4 Methode bearbeiten

Spuren bearbeiten

Für eine im Hauptfenster geöffnete Methode stehen folgende Bearbeitungsfunktionen für Spuren zur Verfügung:

- Neue Spur einfügen
- Spur auswählen
- Spur verschieben
- Spur kopieren
- Spur ausschneiden
- Spur einfügen
- Spur löschen

Weitere Informationen siehe *Methoden - Methodeneditor - Methode bearbeiten - Spuren bearbeiten*.

Neue Spur einfügen

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Einfügen, Neue Spur...** wird das Fenster **Neue Spur** geöffnet, in dem der gewünschte Spurtyp ausgewählt werden kann:


- Normalspur
- Seristartspur
- Serieendspur
- Exitspur
- Fehlerspur

Nach Klicken auf **[OK]** wird die neue Spur rechts neben der ausgewählten Spur eingefügt.


Spur auswählen

Eine Spur wird ausgewählt, indem mit der linken Maustaste auf den Startbefehl der Spur geklickt wird. Damit werden alle Befehle dieser Spur markiert, d. h. sie werden mit doppelter Linienbreite umrandet.

Nicht ausgewählte Spur

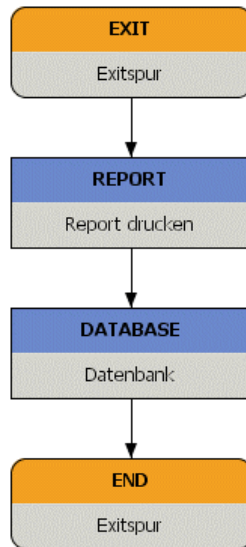

Ausgewählte Spur

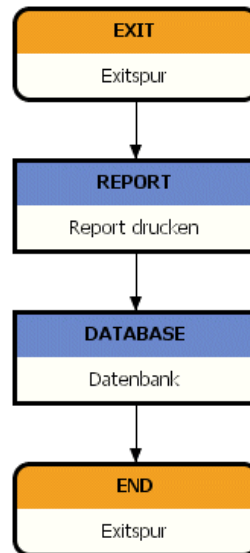

Spur verschieben

Spur per Drag&Drop verschieben

Um eine Spur per Drag&Drop zu verschieben, muss sie zuerst ausgewählt und anschliessend mit gedrückter linker Maustaste an den gewünschten Ort verschoben werden. An den möglichen Stellen erscheint dabei ein roter, senkrechter Pfeil.

Spur via Zwischenablage verschieben

Um eine Spur über die Zwischenablage zu verschieben, muss sie zuerst ausgeschnitten werden. Anschliessend wird eine bestehende Spur ausgewählt und die Spur aus der Zwischenablage rechts neben dieser Spur eingefügt.

Spur kopieren

Spur per Drag&Drop kopieren

Um eine Spur per Drag&Drop zu kopieren, muss sie zuerst ausgewählt und anschliessend mit gedrückter linker Maustaste und gleichzeitig gedrückter Ctrl-Taste an den gewünschten Ort kopiert werden. An den möglichen Stellen erscheint dabei ein roter, senkrechter Pfeil.

Spur in Zwischenablage kopieren

Die ausgewählte Spur wird mit **Bearbeiten, Kopieren**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Kopieren** oder dem Symbol  in die Zwischenablage kopiert.

Spur ausschneiden

Die ausgewählte Spur wird mit **Bearbeiten, Ausschneiden**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Ausschneiden** oder dem Symbol  in die Zwischenablage verschoben.

Spur einfügen

Die in die Zwischenablage kopierte Spur wird mit **Bearbeiten, Einfügen**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Einfügen** oder dem Symbol  rechts neben der ausgewählten Spur eingefügt.

Spur löschen

Die ausgewählte Spur wird mit **Bearbeiten, Löschen**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Löschen**, dem Symbol  oder der Delete-Taste gelöscht.

Befehle bearbeiten

Für eine im Hauptfenster geöffnete Methode stehen folgende Bearbeitungsfunktionen für Befehle zur Verfügung:

- Neuen Befehl einfügen
- Befehle auswählen
- Befehle verschieben
- Befehle kopieren
- Befehle ausschneiden
- Befehle einfügen
- Befehle löschen
- Befehlseigenschaften bearbeiten
- Befehlskommentar eingeben

Weitere Informationen siehe *Methoden - Methodeneditor - Methode bearbeiten - Befehle bearbeiten*.

Neuen Befehl einfügen

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Einfügen, Neuer Befehl...** wird das Fenster **Neuer Befehl** geöffnet, in dem der gewünschte Befehl aus den folgenden Kategorien ausgewählt werden kann:

- **Titration**
DET, MET, SET, KFT, KFC
- **Messen**
MEAS
- **Kalibrieren**
CAL LOOP pH, CAL MEAS pH, CAL LOOP Conc, CAL MEAS Conc
- **Dosieren**
ADD, LQH, PREP, EMPTY
- **Automation**
MOVE, SWING, LIFT, PUMP, STIR, RACK, HEATER, FLOW
- **Resultate**
CALC, DATABASE, REPORT, EXPORT
- **Kommunikation**
CTRL, SCAN, SEND, RECEIVE, TRANSFER
- **Verschiedenes**
REQUEST, CALL, LOOP, WAIT, SEQUENCE

Nach Klicken auf **[OK]** wird der neue Befehl oberhalb des ausgewählten Befehls eingefügt.

Befehl auswählen

Ein Befehl wird durch einen Klick mit der linken Maustaste ausgewählt. Der ausgewählte Befehl wird mit doppelter Linienbreite umrandet. Weitere Befehle derselben Spur können bei gedrückter Ctrl-Taste mit der linken Maustaste zur Auswahl hinzugefügt oder wieder entfernt werden.

Nicht ausgewählter Befehl



Ausgewählter Befehl



Befehle verschieben

Befehle per Drag&Drop verschieben

Um Befehle per Drag&Drop zu verschieben, müssen sie zuerst ausgewählt und anschliessend mit gedrückter linker Maustaste an den gewünschten Ort zwischen zwei Befehlen verschoben werden. An den möglichen Stellen erscheint dabei ein roter, waagrechter Pfeil.

Befehle via Zwischenablage verschieben

Um Befehle über die Zwischenablage zu verschieben, müssen sie zuerst ausgeschnitten werden. Anschliessend wird ein Befehl in einer bestehenden Spur ausgewählt und die Befehle aus der Zwischenablage oberhalb dieses Befehls eingefügt.

Befehle kopieren

Befehle per Drag&Drop kopieren

Um Befehle per Drag&Drop zu kopieren, müssen sie zuerst ausgewählt und anschliessend mit gedrückter linker Maustaste und gleichzeitig gedrückter Ctrl-Taste an den gewünschten Ort zwischen zwei Befehlen kopiert werden. An den möglichen Stellen erscheint dabei ein roter, waagrechter Pfeil.

Befehle in Zwischenablage kopieren

Die ausgewählten Befehle werden mit **Bearbeiten, Kopieren**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Kopieren** oder dem Symbol  in die Zwischenablage kopiert.

Befehle ausschneiden

Die ausgewählten Befehle werden mit **Bearbeiten, Ausschneiden**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Ausschneiden** oder dem Symbol  in die Zwischenablage verschoben.

Befehle einfügen

Die in die Zwischenablage kopierten Befehle werden mit **Bearbeiten, Einfügen**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Einfügen** oder dem Symbol  oberhalb des ausgewählten Befehls eingefügt.

Befehle löschen

Die ausgewählten Befehle werden mit **Bearbeiten, Löschen**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Löschen**, dem Symbol  oder der Delete-Taste gelöscht.

Befehlseigenschaften

Mit **Bearbeiten, Eigenschaften**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Eigenschaften**, dem Symbol  oder einem Doppelklick auf den Befehl wird das Eigenschaftsfenster für den ausgewählten Befehl geöffnet, in dem die Befehlsparameter eingestellt werden können.

Hinweis


Bei den meisten Befehlsparametern mit Zahleneingabe kann anstelle des Parameterwertes auch eine **Formel** eingegeben werden. Dazu muss mit einem Klick mit der rechten Maustaste auf das Eingabefeld der Formel-Editor geöffnet werden.

Beispiel

Eingabe des Startvolumens, das proportional zum Einmass ist: **Startvolumen = 'MV.Einmass' * 0.5**


Befehlskommentar

Mit **Bearbeiten, Kommentar...**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Kommentar** oder dem Symbol  öffnet sich das Dialogfenster **Befehls-Kommentar**, in dem ein neuer Kommentar zum ausgewählten Befehl eingegeben oder ein bestehender bearbeitet werden kann.

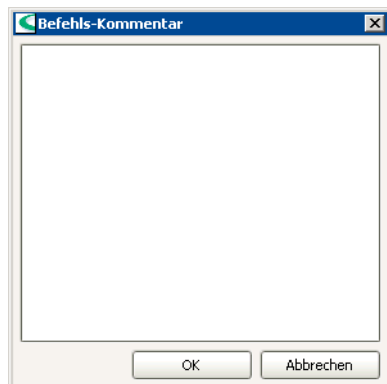


Befehle mit Kommentar werden in der rechten oberen Ecke mit einem roten Dreieck markiert. Befindet sich der Cursor mehr als 1 s in der Nähe dieses Dreiecks, wird der Kommentar als Tooltip angezeigt.

Befehl ohne Kommentar

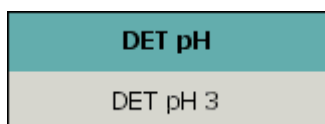

Befehl mit Kommentar

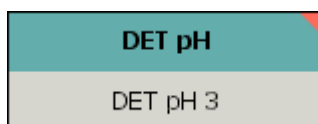

5.2.5 Methode testen

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei, Methodentest** wird ein Methodentest für die fokussierte Methode ausgelöst. Dabei werden die folgenden Punkte getestet:


- Sind die in **CALL**-Befehlen definierten Spuren vorhanden?
- Sind die Ziele von Schleifenbefehlen definiert?
- Sind die in Formeln verwendeten Variablen vorhanden?
- Enthält eine Spur mehr als einen Befehl mit eingeschaltetem Konditionieren?
- Enthält eine Spezialspur (Serienspurspur, Serieendspur, Exitspur und Fehlerspur) einen Befehl mit eingeschaltetem Konditionieren?

Bei jedem Fehler, der gefunden wird, erscheint die entsprechende Fehlermeldung, anschliessend muss der Test erneut gestartet werden. Ist der Methodentest erfolgreich abgeschlossen worden, so erscheint eine entsprechende Meldung.

5.2.6 Methode speichern

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei, Speichern** wird eine bestehende, fokussierte Methode unter ihrem Namen neu gespeichert, ohne dass das Fenster **Methode speichern** geöffnet wird.

Beim Speichern einer neu erstellten Methode dem Menüpunkt **Datei, Speichern** oder beim Speichern einer bestehenden Methode mit dem Menüpunkt **Datei, Speichern unter...** wird das Fenster **Methode speichern** geöffnet, in dem die Methodengruppe ausgewählt und ein Methodenname eingegeben oder ausgewählt werden kann.

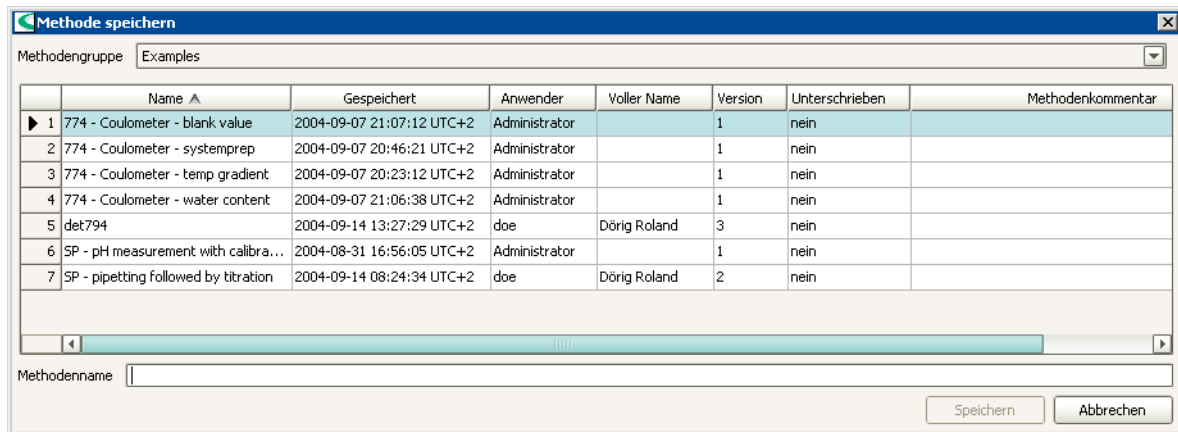

	Name ^	Gespeichert	Anwender	Voller Name	Version	Unterschrieben	Methodenkommentar
1	774 - Coulometer - blank value	2004-09-07 21:07:12 UTC+2	Administrator		1	nein	
2	774 - Coulometer - systemprep	2004-09-07 20:46:21 UTC+2	Administrator		1	nein	
3	774 - Coulometer - temp gradient	2004-09-07 20:23:12 UTC+2	Administrator		1	nein	
4	774 - Coulometer - water content	2004-09-07 21:06:38 UTC+2	Administrator		1	nein	
5	det794	2004-09-14 13:27:29 UTC+2	doe	Dörig Roland	3	nein	
6	SP - pH measurement with calibra...	2004-08-31 16:56:05 UTC+2	Administrator		1	nein	
7	SP - pipetting followed by titration	2004-09-14 08:24:34 UTC+2	doe	Dörig Roland	2	nein	

Methodenname

Methodengruppe

Methodengruppe

Methodengruppen, [Hauptgruppe]

Auswahl der Methodengruppe, in der die Methode gespeichert werden soll.

Methodengruppen

Öffnet das Fenster **Methodengruppen** (siehe *Methoden - Methodengruppen verwalten*) für die Verwaltung der Methodengruppen.

Methodentabelle

Die Methodentabelle enthält Informationen zu allen Methoden der ausgewählten Methodengruppe. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spal-

tentitel (Spalten **Name**, **Gespeichert**, **Anwender**, **Voller Name**, **Version**, **Unterschieden**, **Methodenkommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Methode.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Methode.

Anwender

Kurzname des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Voller Name

Voller Name des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Version

Versionsnummer der Methode.

Unterschieden

Anzeige, ob und wie die Methode unterschrieben wurde.

nein

Die Methode wurde noch nicht unterschrieben. Sie kann zum Bearbeiten geöffnet und gelöscht werden.

Stufe 1

Die Methode wurde auf Stufe 1 elektronisch unterschrieben. Sie kann zum Bearbeiten geöffnet und gelöscht werden. Wird die Methode geändert und neu abgespeichert, so wird eine neue Version angelegt, bei der alle Unterschriften gelöscht sind.

Stufe 2

Die Methode wurde auf Stufe 2 elektronisch unterschrieben. Dadurch ist sie gesperrt und kann weder zum Bearbeiten geöffnet noch gelöscht werden.

Methodenkommentar

Kommentar zur Methode, der im Befehl **START** als Befehlskommentar eingegeben wurde.

Methode speichern

Methodenname

50 Zeichen

Eingabe des Namens, unter dem die Methode gespeichert werden soll.

Hinweis

Der Methodenname muss im ganzen Client/Serversystem eindeutig sein.

Speichern

Speichert die fokussierte Methode unter dem gewünschten Methodennamen in der ausgewählten Methodengruppe.

Vor dem Speichern der Methode wird automatisch der Methodentest durchgeführt, der jederzeit auch manuell ausgelöst werden kann. Dabei wird die Methode soweit als möglich geprüft. Prüfungen auf Geräte, Sensoren und Titriermittel/Lösungen werden erst beim Start der Methode vorgenommen, damit auch Methodenbefehle für Geräte erstellt werden können, die noch nicht in der Konfiguration angemeldet sind. Wird beim Methodentest ein Fehler gefunden, erscheint eine Meldung mit der Frage, ob die Methode trotzdem gespeichert werden soll. Fehlerhafte Methoden können nicht gestartet werden.

Bei jedem Speichern einer geänderten Methode wird eine neue Methodenversion mit einer neuen Methodenidentifikation erzeugt. Ist die Option

Kommentar bei Änderung von Methoden in den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, so erscheint vor der Speicherung das Fenster **Änderungskommentar Methode**.

5.2.7 Änderungskommentar für Methode

Ist die Option **Kommentar bei Änderung von Methoden** in den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, so erscheint beim Speichern einer geänderten Methode oder beim Löschen von Methoden zuerst das Fenster **Änderungskommentar Methode**, in dem eine Begründung ausgewählt und ein Kommentar zur Änderung eingegeben werden muss.

Begründung

Auswahl aus Standardbegründungen

Auswahl aus den im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** definierten Standardbegründungen für die Kategorie **Änderungen Methode**.

Kommentar

1000 Zeichen

Eingabe eines Kommentars zur Änderung an der Methode.

5.2.8 Methoden schliessen

Einzelne Methode schliessen

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei, Schliessen** wird die fokussierte Methode geschlossen. Wurde die Methode geändert, wird nachgefragt, ob die geänderte Methode als neue Methodenversion gespeichert werden soll.


Alle Methoden schliessen

Mit dem Menüpunkt **Datei, Alle schliessen** werden alle geöffneten Methoden geschlossen. Bei jeder Methode, die geändert wurde, wird nachgefragt, ob die geänderte Methode als neue Methodenversion gespeichert werden soll.

5.3 Methoden verwalten

5.3.1 Methoden verwalten

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei, Methoden verwalten...** wird das Fenster **Methoden verwalten** geöffnet, in dem ein Anwender mit entsprechender Zugriffsberechtigung Methoden verwalten kann.

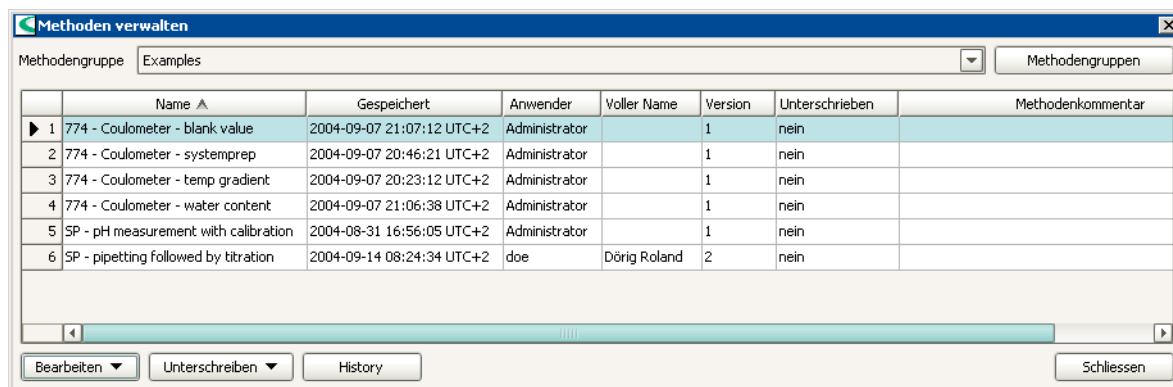

Methodengruppe

Methodengruppe

Methodengruppen, [Hauptgruppe]

Auswahl der Methodengruppe, deren Methoden in der Tabelle angezeigt werden sollen.



Öffnet das Fenster **Methodengruppen** (siehe *Methoden - Methodengruppen verwalten*) für die Verwaltung der Methodengruppen.

Methodentabelle

Die Methodentabelle enthält Informationen zu allen Methoden der ausgewählten Methodengruppe. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Gespeichert**, **Anwender**, **Voller Name**, **Version**, **Unterscriben**, **Methodenkommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Methode.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Methode.

Anwender

Kurzname des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Voller Name

Voller Name des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Version

Versionsnummer der Methode.

Unterscriben

Anzeige, ob und wie die Methode unterschrieben wurde.

nein

Die Methode wurde noch nicht unterschrieben. Sie kann zum Bearbeiten geöffnet und gelöscht werden.

Stufe 1

Die Methode wurde auf Stufe 1 elektronisch unterschrieben. Sie kann zum Bearbeiten geöffnet und gelöscht werden. Wird die Methode geändert und

neu abgespeichert, so wird eine neue Version angelegt, bei der alle Unterschriften gelöscht sind.

Stufe 2

Die Methode wurde auf Stufe 2 elektronisch unterschrieben. Dadurch ist sie gesperrt und kann weder zum Bearbeiten geöffnet noch gelöscht werden.

Methodenkommentar

Kommentar zur Methode, der im Befehl **START** als Befehlskommentar eingegeben wurde.

Fenstermenüs



Das Menü **Bearbeiten** unterhalb der Methodentabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Umbenennen...

Ausgewählte Methode umbenennen.

Kopieren

Ausgewählte Methode(n) in der gleichen Methodengruppe kopieren.

Verschieben...

Ausgewählte Methode(n) in eine andere Methodengruppe verschieben.

Löschen...

Ausgewählte Methode(n) löschen.

Exportieren...

Ausgewählte Methode(n) exportieren.

Importieren...

Methode(n) importieren.



Das Menü **Unterschreiben** unterhalb der Methodentabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Unterschrift 1...

Ausgewählte Methode auf Stufe 1 unterschreiben.

Unterschrift 2...


Ausgewählte Methode auf Stufe 2 unterschreiben.

Unterschriften anzeigen...

Alle Unterschriften der ausgewählten Methode anzeigen.

Unterschriften 2 löschen...


Alle Unterschriften der Stufe 2 der ausgewählten Methode löschen.

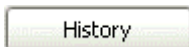

Öffnet das Fenster **Methoden-History** für die ausgewählte Methode.

5.3.2 Methode umbenennen

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Umbenennen...** im Fenster **Methoden verwalten** öffnet sich das Fenster **Methode umbenennen** zum Umbenennen der ausgewählten Methode.

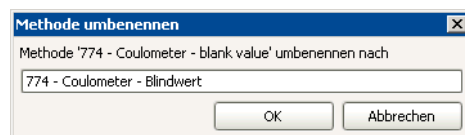

Methode 'Name' umbenennen nach 50 Zeichen

Eingabe des neuen Methodennamens.

Hinweise

Der Methodenname muss im ganzen Client/Serversystem eindeutig sein.

Gesperrte Methoden können nicht umbenannt werden.


Das Umbenennen einer Methode gilt nicht als Änderung, d.h. die Methodenversion bleibt gleich.

5.3.3 Methode kopieren

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Kopieren** im Fenster **Methoden verwalten** werden die ausgewählten Methoden in der gleichen Methodengruppe unter dem Namen **Kopie von 'Methodenname'** kopiert.

5.3.4 Methode verschieben

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Verschieben...** im Fenster **Methoden verwalten** werden die ausgewählten Methoden in die gewünschte Methodengruppe verschoben. Zur Wahl der Methodengruppe erscheint das Fenster **Methode(n) verschieben**.

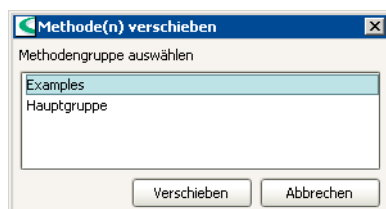

Methodengruppe auswählen

Gruppennamen, [Hauptgruppe]

Auswahl der Methodengruppe, in welche die ausgewählten Methoden verschoben werden sollen.

Hinweis

Gesperrte Methoden können nicht verschoben werden.

5.3.5 Methode löschen

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Löschen** im Fenster **Methoden verwalten** werden die ausgewählten Methoden mit sämtlichen Methodenversionen gelöscht.

Ist die Option **Kommentar bei Änderung von Methoden** in den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, so erscheint beim Löschen von Methoden zuerst das Fenster **Änderungskommentar Methode**, in dem eine Begründung ausgewählt und ein Kommentar zum Löschen eingegeben werden kann, der im Audit Trail aufgezeichnet wird.

Hinweis

Gesperrte Methoden können nicht gelöscht werden.

5.3.6 Methode exportieren

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Exportieren...** im Fenster **Methoden verwalten** werden die ausgewählten Methoden je in eine Datei mit dem Namen **'Methodenname'.mmet** exportiert. Es öffnet sich das Dialogfenster **Verzeichnis für Export wählen**, in dem das Verzeichnis für den Export ausgewählt werden muss.

Hinweis

Die exportierten Methoden werden unverschlüsselt, aber mit einer Checksumme gespeichert. Wird eine so gespeicherte Datei manipuliert, kann sie nicht mehr importiert werden.

5.3.7 Methode importieren

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Importieren...** im Fenster **Methoden verwalten** öffnet sich das Dialogfenster **Dateien für Import auswählen**, in dem die zu importierenden Methoden ausgewählt werden müssen. Diese Methoden werden anschliessend in die geöffnete Methodengruppe importiert.

5.3.8 Methoden unterschreiben

Regeln

Methoden können in *tiamo* in zwei Stufen **elektronisch unterschrieben** werden. Dabei gelten folgende Regeln:

- **Unterschriftsstufen**
Methoden können durch Eingabe des Anwendernamens und des Passwortes in zwei Stufen (Unterschrift Stufe 1 und Unterschrift Stufe 2) unterschrieben werden.
- **Mehrmaliges Unterschreiben**
Methoden können auf jeder Stufe mehrmals unterschrieben werden. Alle Unterschriften werden gespeichert und im Audit Trail dokumentiert.
- **Unterschreiben auf Stufe 1**
Ist auf Stufe 2 unterschrieben worden, kann nicht mehr auf Stufe 1 unterschrieben werden.
- **Unterschreiben auf Stufe 2**
Auf Stufe 2 kann erst unterschrieben werden, wenn bereits auf Stufe 1 unterschrieben wurde.
- **Unterschiedliche Anwender**
Der gleiche Anwender darf nur entweder auf Stufe 1 oder auf Stufe 2 unterschreiben.
- **Begründung und Kommentar**
Zu jeder Unterschrift gehört eine Begründung, die aus vordefinierten Standardbegründungen ausgewählt werden muss. Zusätzlich kann ein weiterer Kommentar eingegeben werden.
- **Gespeicherte Daten**
Zu jeder Unterschrift werden Unterschriftsdatum, Anwendername, Voller Name, Begründung und Kommentar gespeichert.
- **Löschen von Unterschriften 1**
Unterschriften auf Stufe 1 werden beim Erstellen einer neuen Version automatisch wieder gelöscht.
- **Löschen von Unterschriften 2**
Unterschriften auf Stufe 2 können durch den dazu berechtigten Anwender wieder gelöscht werden.
- **Methoden unterschreiben**
Methoden können immer nur einzeln unterschrieben werden.

- **Unterschriftsoptionen**

Die Optionen für Elektronische Unterschriften werden auf der Registerkarte Unterschriften im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** eingestellt.

Methode auf Stufe 1 unterschreiben

Mit dem Menüpunkt **Unterschreiben, Unterschrift 1...** im Fenster **Methoden verwalten** öffnet sich das Fenster **Unterschrift Stufe 1** zum Unterschreiben der ausgewählten Methode auf Stufe 1. Methoden können mehrmals auf dieser Stufe unterschrieben werden.

Hinweis

Methoden, die auf Stufe 1 unterschrieben wurden, können geändert und gelöscht werden. Wird die geänderte Methode als neue Methodenversion gespeichert, werden aber alle Unterschriften automatisch gelöscht, d.h. die Methode muss wieder neu unterschrieben werden.

Info

In diesem Feld werden Informationen zum Unterschreiben und Löschen von Unterschriften angezeigt. Möglich sind die folgenden Meldungen:

Unterschrift möglich

Die ausgewählte Methode kann unterschrieben werden.

Unterschrift 1 nicht möglich (Unterschrift 2 vorhanden)

Die ausgewählte Methode kann nicht mehr auf Stufe 1 unterschrieben werden, da sie bereits auf Stufe 2 unterschrieben wurde.

Unterschrift nicht möglich (Zugriff durch anderen Client)

Die ausgewählte Methode kann nicht unterschrieben werden, da sie bereits auf einem anderen Client zum Unterschreiben markiert ist.

Anwender

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Passwort

Eingabe des Passwortes.

Begründung

Auswahl aus Standardbegründungen

Auswahl aus den im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** definierten Standardbegründungen für die Kategorie **Unterschrift Stufe 1**.

Kommentar

1000 Zeichen

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Unterschreiben

Methode unterschreiben. Das Fenster bleibt geöffnet.

Hinweis

Methoden können nur auf Stufe 1 unterschrieben werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehört, welche die entsprechende Berechtigung dazu hat.

Methode auf Stufe 2 unterschreiben

Mit dem Menüpunkt **Unterschreiben, Unterschrift 2...** im Fenster **Methoden verwalten** öffnet sich das Fenster **Unterschrift Stufe 2** zum Unterschreiben der ausgewählten Methode auf Stufe 2. Methoden können mehrmals auf dieser Stufe unterschrieben werden.

Hinweis

Methoden, die auf Stufe 2 unterschrieben wurden, sind **gesperrt**, d.h. sie können weder geändert noch gelöscht werden. Um solche Methoden wieder bearbeiten zu können, müssen zuerst die Unterschriften auf Stufe 2 gelöscht werden (siehe **Unterschrift 2 löschen**).

Info

In diesem Feld werden Informationen zum Unterschreiben und Löschen von Unterschriften angezeigt. Möglich sind die folgenden Meldungen:

Unterschrift möglich

Die ausgewählte Methode kann unterschrieben werden.

Unterschrift 2 nicht möglich (Unterschrift 1 fehlt)

Die ausgewählte Methode kann nicht auf Stufe 2 unterschrieben werden, da sie auf Stufe 2 noch nicht unterschrieben wurde.

Unterschrift nicht möglich (Zugriff durch anderen Client)

Die ausgewählte Methode kann nicht unterschrieben werden, da sie bereits auf einem anderen Client zum Unterschreiben markiert ist.

Anwender

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Passwort

Eingabe des Passwortes.

Begründung

Auswahl aus Standardbegründungen

Auswahl aus den im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** definierten Standardbegründungen für die Kategorie **Unterschrift Stufe 2**.

Kommentar

1000 Zeichen

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Unterschreiben

Methode unterschreiben. Das Fenster bleibt geöffnet.

Hinweis

Methoden können nur auf Stufe 2 unterschrieben werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehört, welche die entsprechende Berechtigung dazu hat.

Methodenunterschriften anzeigen

Mit dem Menüpunkt **Unterschreiben, Unterschriften anzeigen...** im Fenster **Methoden verwalten** öffnet sich das Fenster **Unterschriften - Methode 'Methodenname'** mit einer Tabelle, in der Informationen zu sämtlichen Unterschriften für die ausgewählte Methode angezeigt werden.

	Unterschrift	Unterschriftsdatum	Anwender	Voller Name	Begründung	Unterschriftskommentar
1	Stufe 2	2004-11-02 14:55:36 UTC+1	doe	Dörig Roland	Genehmigung	
2	Stufe 1	2004-11-02 14:55:11 UTC+1	ds	Strohm Dieter	Prüfung	

Unterschrift

Anzeige, auf welcher Stufe die Methode unterschrieben wurde (**Stufe 1** oder **Stufe 2**).

Unterschriftsdatum

Datum und Zeitpunkt, an dem die Methode unterschrieben wurde.

Anwender

Kurzname des Anwenders, welcher die Methode unterschrieben hat.

Voller Name

Voller Name des Anwenders, welcher die Methode unterschrieben hat.

Begründung

Begründung zur Unterschrift.

Unterschriftskommentar

Kommentar zur Unterschrift.

Unterschriften 2 für Methoden löschen

Mit dem Menüpunkt **Unterschreiben, Unterschriften 2 löschen...** im Fenster **Methoden verwalten** öffnet sich das Fenster **Unterschriften Stufe 2 löschen** zum Löschen aller Unterschriften auf Stufe 2 für die ausgewählte Methode.

Anwender

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Passwort

Eingabe des Passwortes.

5.4 Methodengruppen verwalten

5.4.1 Methodengruppen verwalten

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei, Methodengruppen...** wird das Fenster **Methodengruppen** geöffnet, in dem ein Anwender mit entsprechender Zugriffsberechtigung Methodengruppen verwalten kann. Die Informationen zu den bestehenden Methodengruppen werden in einer Tabelle angezeigt. Die Tabelle ist nicht editierbar und wird nicht automatisch aktualisiert. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Methodengruppen						
	Name ▲	Anzahl	Gespeichert	Anwender	Voller Name	Kommentar
▶ 1	Examples	8	2004-09-14 08:09:59 UTC+2	doe	Dörig Roland	
2	Hauptgruppe	3	2004-08-12 07:32:53 UTC+2	doe		

Neu Eigenschaften Löschen Schliessen

Name

Name der Methodengruppe.

Anzahl

Anzeige der Anzahl Methoden in der Methodengruppe.

Erstellt

Datum und Zeit bei der Erstellung der Methodengruppe.

Anwender


Kurzname des Anwenders, welcher die Methodengruppe erstellt hat.

Voller Name

Voller Name des Anwenders, welcher die Methodengruppe erstellt hat.

Kommentar


Kommentar zur Methodengruppe.

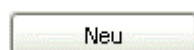

Öffnen des Dialogfensters **Eigenschaften - Methodengruppe - Neue Gruppe**, in dem eine neue Methodengruppe definiert werden kann.



Öffnen des Dialogfensters **Eigenschaften - Methodengruppe - 'Name'**, in dem die in der Tabelle ausgewählte Methodengruppe bearbeitet werden kann.

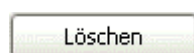

Die in der Tabelle ausgewählte Methodengruppe löschen.

5.4.2 Methodengruppen bearbeiten

Mit der Schaltfläche **[Eigenschaften]** oder einem Doppelklick auf die Tabellenzeile wird das Eigenschaftsfenster **Eigenschaften - Methodengruppe 'Name'** für die ausgewählte Methodengruppe geöffnet.

Die Parameter für Methodengruppen werden auf den folgenden 2 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein**
Allgemeine Parameter.
- **Zugriffsrechte**
Zugriffsrechte auf Methodengruppen und deren Methoden.

Allgemein

Name

50 Zeichen

Name der Methodengruppe. Der Name muss beim Erstellen einer neuen Methodengruppe eingegeben werden.

Anzahl

Anzeige der Anzahl Methoden in der Methodengruppe.

Kommentar

1000 Zeichen

Frei definierbare Bemerkungen zur Methodengruppe.

Zugriffsrechte

Zugriffsrechte auf Methodengruppen und deren Methoden können pro Anwendergruppe vergeben werden.

Hinweis

Die Anwendergruppe **Administratoren** besitzt immer beide Zugriffsrechte, d. h. diese können nicht ausgeschaltet werden.

Anwendergruppe	Ausführen	Bearbeiten
1 Administratoren	☒	☒
2 Anwender	☒	☒

Ausführen

[ein], aus

Berechtigung für Start von Methoden aus der Methodengruppe. Methoden dieser Gruppe können geöffnet und gestartet, aber nicht geändert oder gelöscht werden.

Bearbeiten

[ein], aus

Berechtigung für Bearbeiten von Methoden aus der Methodengruppe. Methoden dieser Gruppe können geöffnet, gestartet, geändert und gelöscht werden. Zudem können neue Methoden hinzugefügt werden.

5.5 Spuren


5.5.1 Allgemeines

Definition

Eine **Spur** ist ein Teilablauf einer Methode, die aus Befehlen aufgebaut ist. Neben der Hauptspur, die in jeder Methode vorhanden ist, gibt es Normalspuren, die vom Anwender erzeugt und mit einem **CALL**-Befehl aufgerufen werden und **Spezialspuren** (Seriestartspur, Serieendspur, Exitspur und Fehlerspur), die nicht aufgerufen werden können, sondern nur bei bestimmten Ereignissen automatisch gestartet werden.

Aufbau

Jede Spur enthält einen **START**- bzw. **TRACK**-Befehl und einen **END**-Befehl, zwischen denen beliebige Befehle eingefügt werden können.

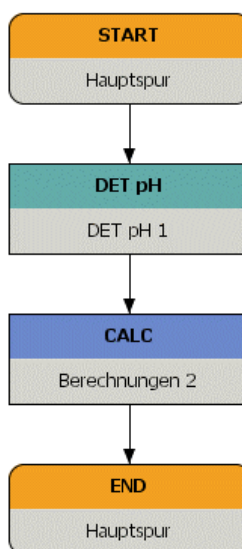


Darstellung

Die einzelnen Spuren werden im Methodenfenster nebeneinander angeordnet. Der Spurname erscheint sowohl im **START**- bzw. **TRACK**-Befehl wie auch im **END**-Befehl.

5.5.2 Spurtypen

Hauptspur

Die **Hauptspur** enthält den Hauptablauf der Methode und ist in jeder Methode vorhanden. Sie beginnt mit einem Startbefehl **START** und endet mit einem Endbefehl **END**. Der Startbefehl stellt die nötigen Variablen zur Verfügung. Der Endbefehl bezeichnet das Ende des Methodenablaufs. Die Hauptspur kann nicht gelöscht oder verschoben werden.

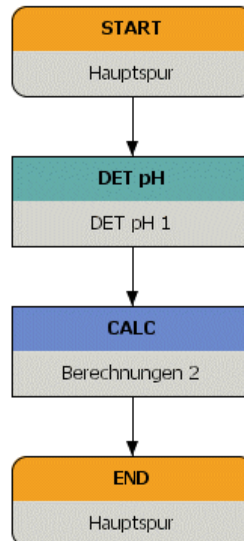


Normalspur

Eine **Normalspur** ist eine Spur, die vom Anwender manuell mit **Einfügen, Neue Spur, Normalspur** oder mit dem Symbol  erzeugt werden kann. Sie beginnt mit einem Startbefehl **TRACK** und endet mit einem Endbefehl **END**.


Normalspuren können durch den Befehl **CALL** und die Eingabe des entsprechenden Namens aufgerufen werden. Damit lassen sich Verzweigungen und parallele Prozesse realisieren. Beim Aufruf von Normalspuren unterscheidet man die beiden folgenden Fälle:

- **Sequentiell ablaufende Normalspur**
Ist die Option **Sofort zurückmelden** im **TRACK**-Befehl ausgeschaltet, werden beim Aufruf der Normalspur der Reihe nach alle Befehle dieser Spur abgearbeitet. Anschliessend meldet sich die Spur beim aufrufenden **CALL**-Befehl zurück und der Ablauf wird dort fortgesetzt.
- **Parallel ablaufende Normalspur**
Ist die Option **Sofort zurückmelden** im **TRACK**-Befehl eingeschaltet, wird der entsprechende Befehl mit einem Pfeil markiert (siehe unten). Beim Aufruf der Normalspur wird die Abarbeitung der Befehle in dieser Spur gestartet, die Spur meldet sich aber sofort beim aufrufenden **CALL**-Befehl zurück. Dadurch wird auch der Ablauf in der aufrufenden Spur fortgesetzt, d. h. die beiden Spuren werden parallel abgearbeitet.

Sequentiell ablaufende Normalspur

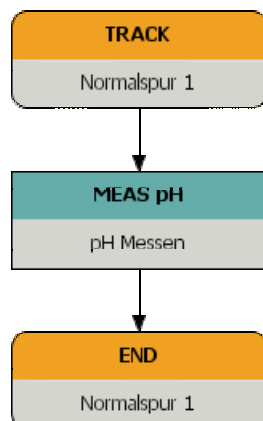


Parallel ablaufende Normalspur

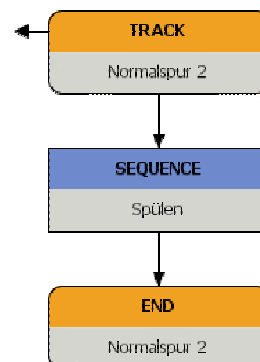

Seriestartspur

Eine **Seriestartspur** ist eine Spur, die vom Anwender manuell mit **Einfügen, Neue Spur, Seriostartspur** oder mit dem Symbol  erzeugt werden kann. Sie beginnt mit einem Startbefehl **SERIES START** und endet mit einem Endbefehl **END**. Pro Methode kann nur eine Seriostartspur eingefügt werden.


Die Seriostartspur wird im Ablauf nur einmal am Anfang der ersten Bestimmung einer Serie und noch vor der Hauptspur ausgeführt. Mit ihr können z. B. Probenwechsler zu Beginn einer Serie initialisiert werden.

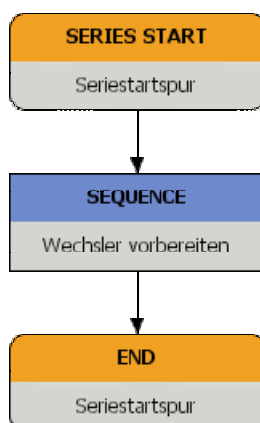

Serieendspur

Eine **Serieendspur** ist eine Spur, die vom Anwender manuell mit **Einfügen, Neue Spur, Serieendspur** oder mit dem Symbol  erzeugt werden kann. Sie beginnt mit einem Startbefehl **SERIES END** und endet mit einem Endbefehl **END**. Pro Methode kann nur eine Serieendspur eingefügt werden.

Die Serieendspur wird im Ablauf nur einmal am Schluss der letzten Bestimmung einer Serie nach der Hauptspur ausgeführt. Mit ihr können z. B. Probenwechsler am Ende einer Serie in den gewünschten Zustand gebracht werden.

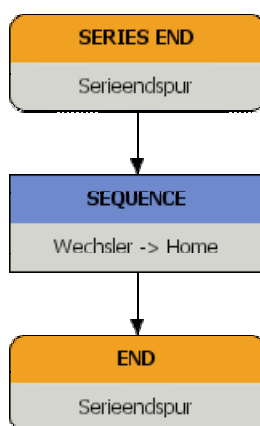


Exitspur

Eine **Exitspur** ist eine Spur, die vom Anwender manuell mit **Einfügen, Neue Spur, Exitspur** oder mit dem Symbol  erzeugt werden kann. Sie beginnt mit einem Startbefehl **EXIT** und endet mit einem Endbefehl **END**. Pro Methode kann nur eine Exitspur eingefügt werden.

Die Exitspur wird im Ablauf ausgeführt, wenn alle Normalspuren und die Hauptspur sowie eine allfällige Fehlerspur beendet sind oder wenn die Bestimmung


manuell abgebrochen wird. Beim Erzeugen einer neuen Exitspur werden automatisch ein **REPORT**-Befehl und ein **DATABASE**-Befehl in dieser Spur eingefügt. Mit diesen Befehlen kann sichergestellt werden, dass für jede Bestimmung ein Datenbankseintrag und ein Report erstellt werden, auch wenn die Bestimmung manuell oder aufgrund eines Fehlers abgebrochen wurde.

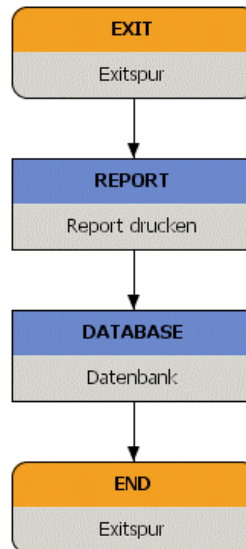

Fehlerspur

Eine **Fehlerspur** ist eine Spur, die vom Anwender manuell mit **Einfügen, Neue Spur, Fehlerspur** oder mit dem Symbol  erzeugt werden kann. Sie beginnt mit einem Startbefehl **ERROR** und endet mit einem Endbefehl **END**. Pro Methode kann nur eine Fehlerspur eingefügt werden.

Die Fehlerspur wird im Ablauf ausgeführt, wenn die Bestimmung durch einen Fehler abgebrochen wird. Die Fehlerspur übernimmt in diesem Fall die Funktion der Hauptspur. Von ihr aus können ebenfalls Normalspuren aufgerufen werden.

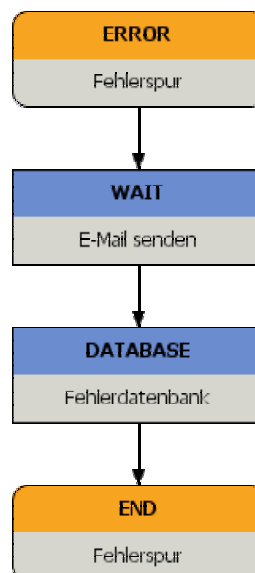

5.5.3 Spuren bearbeiten

Für eine im Hauptfenster geöffnete Methode stehen folgende Bearbeitungsfunktionen für Spuren zur Verfügung:

- Neue Spur einfügen
- Spur auswählen
- Spur verschieben
- Spur kopieren
- Spur ausschneiden
- Spur einfügen
- Spur löschen

Weitere Informationen siehe *Methoden - Methodeneditor - Methode bearbeiten - Spuren bearbeiten*.

5.6 Befehle

5.6.1 Allgemeines

Definition

Ein **Befehl** ist ein Bestandteil einer Spur mit den folgenden allgemeinen Eigenschaften:

- **Befehlstyp**
Der Befehlstyp definiert die Funktion des Befehls. Die Bezeichnung des Befehlstyps (englische Kurzbezeichnung in Grossbuchstaben für alle Sprachen) kann nicht geändert werden.
- **Befehlsname**
Jeder Befehl hat einen frei wählbaren Befehlsnamen, der innerhalb der Methode eindeutig sein muss.

Hinweis

Wird ein Befehl nachträglich umbenannt, so werden die Verweise auf diesen Befehl (z.B. Befehlsvariablen) innerhalb der Methode automatisch angepasst.

- **Befehlsparameter**
Die Anzahl und Art der Befehlsparameter hängen vom Befehlstyp ab und können in den Befehlseigenschaften editiert werden.
- **Befehle im Ablauf**
Befehle werden im Methodenablauf innerhalb einer Spur der Reihe nach abgearbeitet.

Darstellung

Befehle werden zweizeilig dargestellt. In der ersten Zeile steht der Name des Befehlstyps (z. B. **DET pH**, **CALC**), in der zweiten Zeile der frei wählbare, innerhalb der Methode eindeutige Befehlsname. Standardmässig wird für Befehlsnamen der Name des Befehlstyp mit einer fortlaufenden Nummer verwendet.

DET pH
DET pH 3

Das Feld für den Befehlstyp wird bei den verschiedenen Arten von Befehlen farblich hervorgehoben:

- **Orange**
Spurbefehle
- **Grün**
Befehle für Titrations und Messen
- **Gelb**
Befehle für Probenwechsler und Dosieren
- **Blau**
Alle übrigen Befehle

5.6.2 Befehle bearbeiten

Für eine im Hauptfenster geöffnete Methode stehen folgende Bearbeitungsfunktionen für Befehle zur Verfügung:

- Neuen Befehl einfügen
- Befehle auswählen
- Befehle verschieben
- Befehle kopieren
- Befehle ausschneiden
- Befehle einfügen
- Befehle löschen
- Befehlseigenschaften bearbeiten
- Befehlskommentar eingeben

Weitere Informationen siehe *Methoden - Methodeneditor - Methode bearbeiten - Befehle bearbeiten*.

5.6.3 Befehlsübersicht

- **ADD**
Dosieren eines vordefinierten Volumens.
- **CAL LOOP pH**
Schleife für Kalibrierung von pH-Elektroden.
- **CAL LOOP Conc**
Schleife für Kalibrierung von ionenselektiven Elektroden (ISE-Elektroden).
- **CAL MEAS pH**
Messbefehl für die Kalibrierung von pH-Elektroden.
- **CAL MEAS Conc**
Messbefehl für die Kalibrierung von ionenselektiven Elektroden (ISE-Elektroden).
- **CALC**
Berechnen von Zwischen- und Endresultaten, Titerwerten und Common Variablen.
- **CALL**
Aufrufen von Spuren (Unterprogramme).
- **CTRL**
Setzen von Remote-Ausgangseitungen.
- **DATABASE**
Speichern der Bestimmungsdaten in Datenbanken.
- **DET**
Dynamische Äquivalenzpunkt-Titrationsen.
- **EMPTY**
Entleeren einer Dosiereinheit.
- **END**
End-Befehl für alle Spuren.
- **ERROR**
Start-Befehl für Fehlerspur.
- **EXIT**
Start-Befehl für Exitspur.

- **EXPORT**
Export von Bestimmungsdaten.
- **FLOW**
Gasflusskontrolle des 774 Oven Sample Processor.
- **HEATER**
Steuerung der Ofentemperatur des 774 Oven Sample Processor.
- **KFC**
Coulometrische Karl-Fischer-Titrationen mit voltametrischer Messung.
- **KFT**
Volumetrische Karl-Fischer-Titrationen.
- **LIFT**
Anfahren einer Liftposition.
- **LOOP**
Mehrfache Durchführung von Methodenteilen.
- **LQH**
Umfangreiche Dosiermöglichkeiten mit einem Dosino.
- **MEAS**
Messen.
- **MET**
Monotone Äquivalenzpunkt-Titrationen.
- **MOVE**
Anfahren einer Rackposition oder einer externen Position.
- **PREP**
Vorbereiten einer Wechsel- oder Dosiereinheit.
- **PUMP**
Ein-/Ausschalten der angeschlossenen Pumpen.
- **RACK**
Initialisierung des aufgesetzten Racks.
- **RECEIVE**
Abwarten von Ereignis- oder Statusmeldungen.
- **REPORT**
Ausgabe eines durch die gewählte Reportvorlage definierten Reports.
- **REQUEST**
Abfragen von Probedaten.
- **SCAN**
Abfragen von Remote-Eingangsleitungen.
- **SEND**
Senden von Ereignismeldungen.
- **SERIES END**
Start-Befehl für Serieendspur.
- **SERIES START**
Start-Befehl für Seriestartspur.
- **SEQUENCE**
Zusammenfassen von mehreren Einzelbefehlen.
- **SET**
Set-Endpunkt-Titrationen.
- **START**
Start-Befehl für Hauptspur.
- **STIR**
Steuerung eines angeschlossenen Rührers.

- **SWING**
Schwenken des Schwenkarmes (nur mit Swing Head).
- **TRACK**
Start-Befehl für Normalspur.
- **TRANSFER**
Datentransfer via RS232 zu externen Geräten oder Programmen.
- **WAIT**
Anhalten des Methodenablaufs.

5.6.4 Spurbefehle

Für die verschiedenen Spuren gibt es die folgenden Spurbefehle:

- **START**
Start-Befehl für Hauptspur.
- **TRACK**
Start-Befehl für Normalspur.
- **SERIES START**
Start-Befehl für Seristartspur.
- **SERIES END**
Start-Befehl für Serieendspur.
- **EXIT**
Start-Befehl für Exitspur.
- **ERROR**
Start-Befehl für Fehlerspur.
- **END**
End-Befehl für alle Spuren.

START

Start-Befehl für Hauptspur.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **START** werden auf den folgenden 3 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein**
Allgemeine Einstellungen für den Methodenablauf.
- **Applikationsnotiz**
Möglichkeit zum Erstellen einer Applikationsnotiz, die beim Start der Bestimmung angezeigt wird.
- **Methodenvariablen**
Deklaration von Methoden- und Probenvariablen, die für die Methode verfügbar sein sollen.

Allgemein

Befehlsname

25 Zeichen, [Hauptspur]
Name des Befehls.

Ansicht für Arbeitsplatz

Aktuelle Ansicht

[ein], aus

Mit dieser Option bleibt die auf dem Arbeitsplatz gewählte Ansicht beim Start der Bestimmung geöffnet.

Ansicht

ein, [aus]; Auswahl aus vorhandenen Arbeitsplatzansichten

Mit dieser Option wird die gewählte Arbeitsplatzansicht beim Start der Bestimmung automatisch geöffnet.

Hinweis

Die ausgewählte Arbeitsplatzansicht wird nur beim Start einer Einzelbestimmung oder beim Start der ersten Bestimmung einer Serie geöffnet, nicht jedoch beim Laden einer neuen Methode innerhalb einer Bestimmungsserie.

Spuranzeige für Livefenster

Liveanzeige 1

[Hauptspur], Auswahl aus vorhandenen Spuren

Auswahl der Spur, die im Unterfenster **Liveanzeige 1** angezeigt werden soll.

Liveanzeige 2

[Hauptspur], Auswahl aus vorhandenen Spuren

Auswahl der Spur, die im Unterfenster **Liveanzeige 2** angezeigt werden soll.

Statistik

ein, [aus]

Nur wenn diese Option eingeschaltet ist, werden die im **CALC**-Befehl definierten Statistikfunktionen berechnet.

Hinweis

Damit die Statistik wirklich berechnet wird, muss sie zusätzlich auch noch auf dem Arbeitsplatz eingeschaltet sein.

Anzahl Einzelbestimmungen

1 ... 99, [nicht definiert]

Die hier definierte Anzahl Einzelbestimmungen gilt für alle **CALC**-Befehle in der Methode. Mit **nicht definiert** muss die Anzahl Einzelbestimmungen auf dem Arbeitsplatz definiert werden.

Konditionieren


Automatisches Konditionieren

[ein], aus

Ist diese Option **eingeschaltet**, wird das Konditionieren für alle Befehle (**SET**, **KFT**, **KFC**) mit eingeschaltetem Konditionieren beim Start der Bestimmung automatisch gestartet. Nach dem Ende der Spur mit dem Konditionierbefehl wird automatisch wieder das Konditionieren gestartet, das auch nach dem Ende der Bestimmung fortgeführt wird.

Ist diese Option **ausgeschaltet**, wird das Konditionieren erst beim Start des Befehls gestartet. Nach dem Ende der Spur mit dem Konditionierbefehl wird das Konditionieren nicht mehr gestartet. Für **Automationsanwendungen** muss dieser Parameter ausgeschaltet sein.

Applikationsnotiz

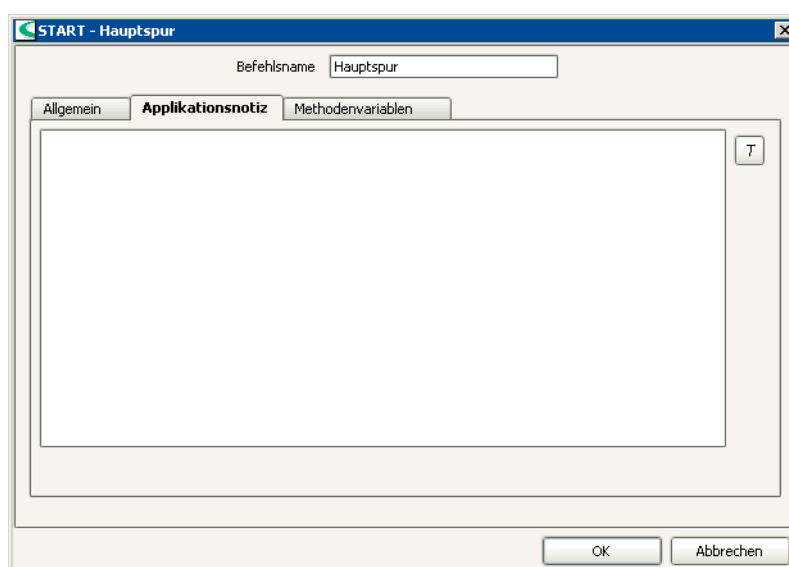

Befehlsname

25 Zeichen, [Hauptspur]

Name des Befehls.

Die im Textfenster definierte Applikationsnotiz wird auf dem Arbeitsplatz im Live-fenster auf einer eigenen Registerkarte angezeigt, welche beim Laden der Methode automatisch geöffnet wird.

Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Applikationsnotiz erstellt oder geändert werden kann.

Methodenvariablen (Tabelle)

START - Hauptspur

Befehlsname:

Tab: Methodenvariablen

	Name	Typ	Zuordnung	Wert	Kommentar	Überwachung
1	Einmass	Zahl	Einmass		Probeneinmass	☐
2	Einheit	Text	Einheit		Einheit für Probeneinmass	☐
3	Probenposition	Zahl	Probenposition		Nummer der Probenposition	☐
4	ID1	Text	ID1		Probenidentifikation 1	☐
5	ID2	Text	ID2		Probenidentifikation 2	☐
6	ID3	Text	ID3		Probenidentifikation 3	☐

Buttons: Neu, Eigenschaften, Löschen, OK, Abbrechen

Befehlsname

25 Zeichen, [Hauptspur]

Name des Befehls.

Hier müssen die Variablen deklariert werden, die innerhalb der Methode in anderen Befehlen (z.B. **CALC**-Befehl) unter der Bezeichnung **MV.'Variablenname'** verfügbar sein sollen. Einer Methodenvariablen kann entweder eine Probedatenvariable zugeordnet (Eintrag im Feld **Zuordnung**) oder direkt ein Wert (Eintrag im Feld **Wert**) zugewiesen werden.

Die Übersichtstabelle zeigt alle deklarierten Methodenvariablen an und ist selber nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Typ**, **Zuordnung**, **Wert**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Zur Bedeutung der Spalten siehe Methodenvariablen (Details).

Neu

Öffnen des Dialogfensters **Methodenvariable - Neu** (siehe *START - Methodenvariable (Eigenschaften)*), in dem eine neue Methodenvariable eingegeben werden kann.

Eigenschaften

Öffnen des Dialogfensters **Methodenvariable - 'Name'** (siehe *START - Methodenvariable (Eigenschaften)*), in dem die in der Tabelle ausgewählte Methodenvariable bearbeitet werden kann.

Löschen

Die in der Tabelle ausgewählte Methodenvariable löschen.

Methodenvariablen (Eigenschaften)

Definition der Methodenvariablen

Name

50 Zeichen

Frei wählbarer Name für die Methodenvariable, der innerhalb der Methode eindeutig sein muss.

Typ

[Text], Zahl, Datum/Zeit

Auswahl des Variablentyps. Bei Variablen mit eindeutigem Typ (**Einmass**, **Einheit**, **Probenposition**) ist dieses Feld nicht editierbar.

Zuordnung

[ein], aus

ID1 ... ID8, Einmass, Einheit, Probenposition

Ist diese Option ausgewählt, kann eine Probedatenvariable ausgewählt werden, die dieser Methodenvariablen zugeordnet werden soll. Dabei werden nur diejenigen Variablen angeboten, die nicht bereits zugeordnet sind. Probedatenvariablen, die nicht einer Methodenvariablen zugeordnet wurden, werden bei den Auswahllisten in anderen Befehlen nicht angeboten und in der Bestimmung nicht gespeichert. In diesem Feld sind keine Formeleingaben zugelassen.

Hinweis

Für die Probedatenvariablen **ID1 ... ID8**, **Einmass**, **Einheit**, **Probenposition** wird auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** im Ablaufenster und auf der Registerkarte **Probe** im Informationsfenster automatisch der Name der zugeordneten Methodenvariablen angezeigt.

Wert

ein, [aus]

-1.0E-99 ... 1.0E+99 (für **Typ** = **Zahl**)

100 Zeichen (für **Typ** = **Text**)

'Datum' (für **Typ** = **Datum/Zeit**)

Ist diese Option ausgewählt, kann der Methodenvariablen ein beliebiger Wert zugewiesen werden. Bei Variablen vom Typ **Datum/Zeit** muss das Datum im Datumseingabefenster eingegeben werden. In diesem Feld sind keine Formeleingaben zugelassen.

Überprüfung beim Start

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird beim Starttest geprüft, ob die Methodenvariable gültig ist und ob bei eingeschalteter Überwachung die Grenzwerte eingehalten werden.

Hinweis

Das Ausschalten dieser Option kann dann sinnvoll sein, wenn die Methodenvariablen beim Start der Methode noch ungültig sind und erst mit einem **REQUEST**-Befehl im Ablauf definiert werden.

Kommentar

1000 Zeichen

Frei wählbarer Kommentar zur Methodenvariablen.

Variable überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, werden die Grenzwerte für die Variable während der ganzen Bestimmung überwacht. Für Methodenvariablen vom Typ **Text** kann die Überwachung nicht eingeschaltet werden.

Untere Grenze

10 Ziffern (für **Typ** = **Zahl**)

'Datum' (für **Typ** = **Datum/Zeit**)

Unterer Grenzwert für die Variable.

Obere Grenze

10 Ziffern (für **Typ** = **Zahl**)

'Datum' (für **Typ** = **Datum/Zeit**)

Oberer Grenzwert für die Variable.

Meldung

Text (unbegrenzt)

Die hier definierte Meldung kann beim Unterschreiten des unteren bzw. beim Überschreiten des oberen Grenzwertes gleichzeitig auf verschiedene

Ziele ausgegeben werden. Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verändert werden kann. Innerhalb des Textfeldes kann auch der Formeleditor aufgerufen werden.

Meldung anzeigen

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, werden bei einer Grenzwertverletzung alle aktiven Spuren angehalten und die im Textfeld definierte Meldung angezeigt.

Meldung dokumentieren


[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird bei einer Grenzwertverletzung die im Textfeld definierte Meldung in der Bestimmung dokumentiert.

Meldung per E-Mail

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird bei einer Grenzwertverletzung die im Textfeld definierte Meldung an die unter **<E-Mail>** definierte Adresse ausgegeben.

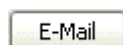

Mit dieser Schaltfläche öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** für die Definition der E-Mail-Parameter.

Akustisches Signal

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird bei einer Grenzwertverletzung zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird bei einer Grenzwertverletzung automatisch eine der beiden möglichen Aktionen ausgeführt.

Bestimmung abbrechen

[ein], aus

Die laufende Bestimmung (oder das Konditionieren) wird abgebrochen, anschliessend wird die nächste Bestimmung der Serie gestartet.

Bestimmung und Serie abbrechen

ein, [aus]

Die laufende Bestimmung (oder das Konditionieren) wird abgebrochen, die nächste Bestimmung der Serie wird nicht gestartet.

TRACK


Start-Befehl für Normalspur.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

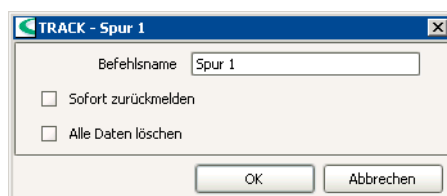

Befehlsname

25 Zeichen, [Spur #]

Name des Befehls.

Sofort zurückmelden

ein, [aus]

Wenn diese Option aktiviert ist, wird nicht auf die Beendigung dieser Spur gewartet, sondern diese meldet sich sofort bei der Spur mit dem Aufruf zurück. Von nun an laufen beide Spuren parallel ab.

Alle Daten löschen

ein, [aus]

Wenn diese Option aktiviert ist, werden bei jedem Start der Spur die zuvor von dieser Spur erzeugten Daten gelöscht.

SERIES START


Start-Befehl für Seristartspur.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

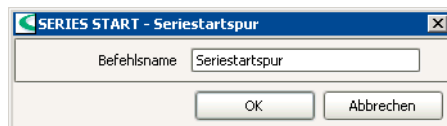

Befehlsname

25 Zeichen, [Seristartspur]

Name des Befehls.

SERIES END


Start-Befehl für Serieendspur.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

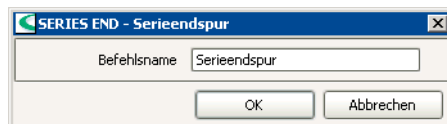

Befehlsname

25 Zeichen, [Serieendspur]

Name des Befehls.

EXIT


Start-Befehl für Exitspur.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

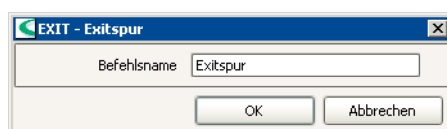

Befehlsname
25 Zeichen, [Exitspur]
Name des Befehls.

ERROR


Start-Befehl für Fehlerspur.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

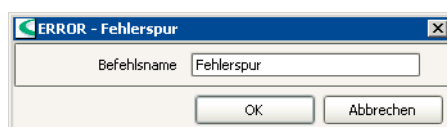

Befehlsname
25 Zeichen, [Fehlerspur]
Name des Befehls.

END

End-Befehl für alle Spuren.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Der END-Befehl hat keine Parameter. Er wird beim Einfügen einer Spur automatisch am Ende der Spur erzeugt.

5.6.5 Titrationsbefehle

Befehle für Titrationen.

Arten

Es können die folgenden Titrations-Befehle ausgewählt werden:


- **DET**
Befehl für Dynamische Äquivalenzpunkt-Titrationen.
- **MET**
Befehl für Monotone Äquivalenzpunkt-Titrationen.
- **SET**
Befehl für Set-Endpunkt-Titrationen.
- **KFT**
Befehl für volumetrische Karl-Fischer-Titrationen.
- **KFC**
Befehl für coulometrische Karl-Fischer-Titrationen mit voltametrischer Messung.

DET

Befehl für **Dynamische Äquivalenzpunkt-Titrationen (DET)**.

Prinzip

Mit diesem Befehl werden Titrationen mit dynamischer, inkrementeller Reagenzzugabe ausgeführt. Die Volumeninkremente variieren abhängig von der Steilheit der Kurve. Dabei werden konstante Messwertänderungen bei jeder Dosierung angestrebt. Das optimale Volumen für die Dosierung wird aus den Messwertänderungen der vorhergehenden Dosierungen ermittelt. Die Messwertübernahme erfolgt driftkontrolliert (Gleichgewichtstitration) oder nach einer Wartezeit. Äquivalenzpunkte werden automatisch ausgewertet.

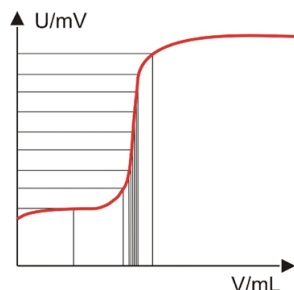

Hinweis

Da die Reagenzdosierung bei **DET** von den Messdaten abhängt, darf die Titrationskurve nicht zu stark von einem S-förmigen Verlauf abweichen.

Befehle

Je nach Messwert können die folgenden vier **DET**-Befehle ausgewählt werden:

- **DET pH**
Potentiometrische pH-Messung mit pH-Elektroden (Messgröße pH).
- **DET U**
Potentiometrische Spannungsmessung mit Metallelektroden (Messgröße Spannung U).

- **DET Ipol**
Voltametrische Messung mit wählbarem Polarisationsstrom (Messgrösse Spannung U).
- **DET Upol**
Amperometrische Messung mit wählbarer Polarisationsspannung (Messgrösse Strom I).

DET pH

Befehl für **Dynamische Äquivalenzpunkt-Titrationsen** mit potentiometrischer pH-Messung.

Geräte


Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **DET** verfügen:

Titrimo: 716, 721, 736, 751, 785, 794, 798, 799

Titrimo: 808, 809, 835, 836

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

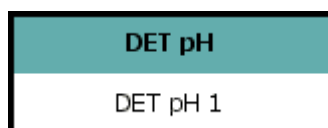

Parameter

Die Parameter für den Befehl **DET pH** werden auf den folgenden 7 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Dosierer, Sensor und Rührer.
- **Startbedingungen**
Parameter für die Messung des Initialmesswertes sowie Definition der Bedingungen, die beim Start der Titration erfüllt sein müssen.
- **Titrimationsparameter**
Parameter für Ablauf der Titration.
- **Abbruchbedingungen**
Definition der Bedingungen, die den Abbruch der Titration bewirken.
- **Potentiometrische Auswertung**
Parameter für die potentiometrische Auswertung der Titrimationskurven.
- **Weitere Auswertungen**
Definition von zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrimationskurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten von anderen Messbefehlen, die als zusätzliche Messwertkolonnen gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

Befehlsname

25 Zeichen, [DET pH #]

Name des Befehls.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [Titrande]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Dosierer

Dosierer

[1] ... 4 (Titrande)

[intern D0] (Titrino)

extern D1, extern D2 (nur Titrino 736, 751, 758, 799)

Auswahl der Nummer des Dosierers (Wechsel- oder Dosiereinheit), mit dem die Lösung dosiert werden soll.

Lösung

24 Zeichen, Lösungsnamen, [nicht definiert]

Eingabe eines Lösungsnamens oder Auswahl eines Titriermittels aus den in der Lösungstabelle vorhandenen Lösungen. Zusätzlich kann **nicht definiert**

ausgewählt werden. Wenn intelligente Wechsel- bzw. Dosiereinheiten verwendet werden, wird im Methodenablauf überprüft, ob die richtige Lösung auf dem gewählten Dosierer aufgesetzt ist und ob der Dosierertyp übereinstimmt. Für nicht-intelligente Wechsel- bzw. Dosiereinheiten wird nur das Zylindervolumen überprüft. Für das gewählte Titriermittel werden beim Start der Titration die Nutzungsdauer, die Gültigkeit des Titors und das GLP-Testintervall überprüft. Ist **nicht definiert** ausgewählt, werden keine Tests durchgeführt.

Sensor

Messeingang

[1] ... 2 (Titrande)

[1] ... 2, **diff.** (Titrino)

Auswahl des Messeinganges, an dem der Sensor angeschlossen ist.

Sensor

Sensorname, [pH electrode]

Auswahl eines pH-Sensors aus den in der Sensortabelle vorhandenen pH-Sensoren. Die Kalibrierdaten des Sensors werden für die Bestimmung übernommen.

Temperaturmessung

Art der Temperaturmessung (nur Titrande):

kontinuierlich

Es muss ein Temperaturfühler angeschlossen sein. Die Temperatur wird dann laufend gemessen.

[**automatisch**]

Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist, wird die Temperatur laufend gemessen. Ansonsten wird die unter **Temperatur** (Registerkarte **Titrationparameter**) manuell eingetragene Temperatur verwendet.

aus

Die Temperatur wird nicht gemessen. Die unter **Temperatur** (siehe *Titrationparameter*) manuell eingetragene Temperatur wird verwendet.

Rührer

Rührer

[1] ... 4, **aus** (nur Titrande)

Auswahl des Rührers. **aus** bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.

Rührgeschwindigkeit

-15 ... [8] ... 15 (nur Titrande)

Einstellen der Rührgeschwindigkeit. Mit dem Vorzeichen der Rührgeschwindigkeit ändert sich die Richtung, in der gerührt wird.

Automatisch ausschalten

[**ein**], **aus** (nur Titrande)

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Automatisch ein-/ausschalten

[**ein**], **aus** (nur Titrino 751, 785, 798, 799)

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer beim Start des Befehles automatisch eingeschaltet und am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Startbedingungen

Die Startbedingungen werden in der aufgeführten Reihenfolge abgearbeitet, bevor die Titration gestartet wird.

The screenshot shows a software window titled 'DET pH - DET pH 4'. Inside, there's a 'Befehlsname' field with 'DET pH 4'. Below are several tabs: 'Potentiometrische Auswertung', 'Weitere Auswertungen', 'Weitere Messwerte', 'Allgemein/Hardware', 'Startbedingungen' (selected), 'Titrationsparameter', and 'Abbruchbedingungen'. The 'Startbedingungen' section contains several input fields and dropdown menus: 'Initialmesswert' with 'Messwertdrift' (aus), 'Min. Wartezeit' (0 s), and 'Max. Wartezeit' (1 s); 'Startvolumen' with 'Startvolumen' (0 mL) and 'Dosiergeschwindigkeit' (maximal mL/min); 'Startmesswert' with 'Startmesswert pH' (aus) and 'Dosiergeschwindigkeit' (5 mL/min); 'Startsteigung' with 'Startsteigung' (aus pH/mL) and 'Dosiergeschwindigkeit' (5 mL/min); and 'Pause' with 'Pause' (0 s). At the bottom are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Befehlsname
25 Zeichen, [DET pH #]
Name des Befehls.

Initialmesswert

Vor dem Abarbeiten der übrigen Startbedingungen wird der Initialmesswert bestimmt. Die Messwertübernahme ist von den drei folgenden Parametern abhängig:

Messwertdrift

0.1 ... 999.0 mV/min, [aus] (nur Titrande)

Der Messwert wird erst übernommen, wenn die Messwertdrift den hier eingegebenen Wert unterschreitet. **aus** bedeutet, dass die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit erfolgt.

Min. Wartezeit

[0] ... 999999 s (nur Titrande)

Die minimale Wartezeit ist nur für driftkontrollierte Messungen von Bedeutung. Die Messwertübernahme erfolgt erst nach Ablauf der minimalen Wartezeit, auch wenn die Messwertdrift schon erreicht ist. Während des Ablaufs der minimalen Wartezeit wird die Drift weiterhin kontrolliert.

Max. Wartezeit

0 ... [1] ... 999999 s (nur Titrande)

Wenn die Messwertdrift ausgeschaltet oder noch nicht erreicht ist, erfolgt die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit.

Startvolumen

Startvolumen

[0.00000] ... 9999.99 mL (Titrand)

[0.000] ... 999.99 mL (Titrino)

Volumen, das vor dem Start der Titration mit der angegebenen Dosiergeschwindigkeit zudosiert werden soll.

Dosiergeschwindigkeit

0.01 ... 166.00 mL/min, [maximal] (Titrand)

0.01 ... 150.00 mL/min, [maximal] (Titrino)

Geschwindigkeit, mit der das Startvolumen dosiert werden soll. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Startmesswert

Startmesswert pH

-20.000 ... 20.000, [aus] (nur Titrand)

Wird der Startmesswert erreicht, wird die Vordosierung abgebrochen und die nächste Startbedingung abgearbeitet, bzw. die Titration gestartet. Wenn mit der Dosierung eines Startvolumens der Startmesswert bereits erreicht ist, wird direkt die Titration gestartet.

Dosiergeschwindigkeit

0.01 ... [5.00] ... 166.00 mL/min, maximal (nur Titrand)

Geschwindigkeit, mit der zudosiert wird, bis der Startmesswert erreicht ist. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Startsteigung

Startsteigung

0.000 ... 9.999 pH/mL, [aus] (nur Titrand)

Wird die Startsteigung erreicht, wird die Vordosierung abgebrochen und die Titration gestartet. Wenn mit der Dosierung eines Startvolumens die Startsteigung bereits erreicht ist, wird direkt die Titration gestartet.

Dosiergeschwindigkeit

0.01 ... [5.00] ... 166.00 mL/min, maximal (nur Titrand)

Geschwindigkeit, mit der zudosiert wird, bis die Startsteigung erreicht ist. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Pause

Pause

[0] ... 999999 s

Wartezeit, z.B. zum Einschwingen der Elektrode nach dem Start oder Reaktionszeit nach dem Dosieren eines Startvolumens. Die Pause läuft am Ende aller Startbedingungen ab.

Titrationparameter

Parameter für den Ablauf der Titration.

Befehlsname

25 Zeichen, [DET pH #]

Name des Befehls.

Titrationgeschwindigkeit

Titrationgeschwindigkeit

Für die Titrationsgeschwindigkeit können die drei vordefinierten Parametersätze **langsam**, **optimal** und **schnell** gewählt werden, bei denen die Parameter für **Messwertübernahme** und **Dosieren der Inkremente** nicht angezeigt werden. Um diese Parameter editieren zu können, muss die Einstellung **Anwender** ausgewählt werden.

langsam

Für Titrationen, bei denen auch kleinste Details sichtbar sein sollen. Allerdings kann dadurch auch das Rauschen verstärkt werden, was zu unerwünschten EPs führen kann.

[optimal]

Parametersatz für alle Standardtitrationen, für die häufigsten Anwendungen optimiert.

schnell

Für wenig kritische, schnelle Titrationen.

Anwender

Anwenderdefinierte Einstellung der einzelnen Parameter, welche die Titrationsgeschwindigkeit beeinflussen.

Messwertübernahme

(wird nur für **Titrationgeschwindigkeit** = Anwender angezeigt)

Messwertdrift

0.1 ... [20.0 (langsam)] ... [50.0 (optimal)] ... [80.0 (schnell)] ... 999.0 mV/min (Titrando)

0.5 ... [20.0 (langsam)] ... [50.0 (optimal)] ... [80.0 (schnell)] ... 999.0 mV/min (Titrino)

aus

Drift für die Messwertübernahme während der Titration. **aus** bedeutet, die Messwertübernahme erfolgt nach der maximalen Wartezeit.

Min. Wartezeit

[0 (langsam, optimal, schnell)] ... 999999 s (nur Titrande)

Die minimale Wartezeit ist nur für driftkontrollierte Messungen von Bedeutung. Die Messwertübernahme erfolgt erst nach Ablauf der minimalen Wartezeit, auch wenn die Messwertdrift schon erreicht ist. Während des Ablaufs der minimalen Wartezeit wird die Drift weiterhin kontrolliert.

Max. Wartezeit

0 ... [38 (langsam)] ... [26 (optimal)] ... [21 (schnell)] ... 999999 s (Titrande)

0 ... [38 (langsam)] ... [26 (optimal)] ... [21 (schnell)] ... 9999 s (Titrino)

Wenn die Messwertdrift ausgeschaltet oder noch nicht erreicht ist, erfolgt die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit. Falls die Wartezeit nicht neu eingegeben wurde, wird automatisch eine zur Drift passende Wartezeit nach folgender Formel berechnet:

$$\text{Wartezeit} = 150 / \sqrt{\text{Drift} + 0.01} + 5$$

Dosieren der Inkremente

(wird nur für **Titrationsgeschwindigkeit** = Anwender angezeigt)

Messpunktdichte

0 ... [2 (langsam)] ... [4 (optimal)] ... [6 (schnell)] ... 9

Ein kleiner Wert bedeutet kleine Volumeninkremente, d.h. eine hohe Messpunktdichte. Die Kurve gibt dann alle feinsten Details wieder, was allerdings auch Rauschen bedeuten und zu unerwünschten Äquivalenzpunkten führen kann. Ein grosser Wert, d.h. eine kleine Messpunktdichte, erlaubt schnellere Titrationen. Wenn Sie mit kleinen Zylindervolumen beim Dosieren arbeiten, kann ein kleinerer Wert für die Messpunktdichte vorteilhaft sein. Gleichzeitig sollten aber eine kleinere Messwertdrift und ein höheres EP-Kriterium gesetzt werden.

Min. Inkrement

0.1 ... [10.0 (langsam, optimal)] ... [30.0 (schnell)] ... 999.9 µL (Titrande)

0.0 ... [10.0 (langsam, optimal)] ... [30.0 (schnell)] ... 999.9 µL (Titrino)

Dieses kleinste erlaubte Volumeninkrement wird zu Beginn der Titration und bei steilen Kurven im Bereich des Äquivalenzpunktes dosiert. Sehr kleine Werte sollen nur verwendet werden, wenn kleine Titriermittelverbräuche erwartet werden. Sonst könnten unerwünschte Äquivalenzpunkte ausgewertet werden.

Max. Inkrement

0.1 ... 9999.9 µL, [aus] (nur Titrande)

Ein maximales Volumeninkrement sollte gewählt werden, wenn der Titriermittelverbrauch bis zum Erreichen des Äquivalenzpunktes sehr klein ist, ein Startvolumen bis kurz vor Erreichen des Äquivalenzpunktes dosiert wird oder wenn der Richtungswechsel im Sprungbereich sehr abrupt ist, da sonst im Bereich des Äquivalenzpunktes leicht ein zu grosses Volumen dosiert wird. Der Wert sollte nicht kleiner als 1/100 des Zylindervolumens sein.

Dosiergeschwindigkeit

0.01 ... 166.00 mL/min, [maximal] (Titrande)

0.01 ... 150.00 mL/min, [maximal] (Titrino)

Geschwindigkeit, mit der die Volumeninkremente zudosiert werden. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Temperatur

Temperatur

-20.0 ... [25.0] ... 150.0 °C (Titrando)

-170.0 ... [25.0] ... 500.0 °C (Titrino)

Titrationstemperatur, die manuell eingegeben werden kann. Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist und die **Temperaturmessung** in der Registerkarte **Allgemein / Hardware** unter **Sensor** auf **automatisch** oder **kontinuierlich** eingestellt ist, wird die Temperatur laufend gemessen. Der Wert wird für die Temperaturkorrektur bei pH-Messungen benützt.

Abbruchbedingungen

Bedingungen für den Abbruch der Titration. Sind mehrere Abbruchbedingungen gesetzt, führt dasjenige Kriterium zum Abbruch der Titration, das zuerst erreicht wird.

Befehlsname

25 Zeichen, [DET pH #]

Name des Befehls.

Stoppvolumen

0.00000 ... [100.000] ... 9999.99 mL, aus (Titrando)

0.000 ... [100.000] ... 9999.99 mL, aus (Titrino)

Abbruch, wenn seit dem Start der Titration (einschliesslich Startbedingungen) das eingegebene Volumen dosiert wurde. Passen Sie das Stoppvolumen dem Probeneinmass oder der Grösse Ihres Titriergefässes an.

Stoppmesswert pH

-20.000 ... 20.000, [aus] (Titrando)

-20.00 ... 20.00, [aus] (Titrino)

Abbruch, wenn seit dem Start der Titration der eingegebene Messwert für einen Messpunkt über- bzw. unterschritten wurde.

Stopp EP

1 ... [9], aus

Abbruch, wenn die eingegebene Anzahl Äquivalenzpunkte gefunden wurde.

Volumen nach EP

0.01000 ... 9999.99 mL, [aus] (nur Titrando)

Wenn die unter **Stopp EP** eingegebene Anzahl Äquivalenzpunkte gefunden wurde, wird dieses Volumen dosiert. So sieht man auch den Kurvenverlauf nach Erreichen des Endpunktes.

Stoppzeit

0 ... 999999 s, [aus] (nur Titrando)

Abbruch, wenn nach dem Start der Titration (einschliesslich Startbedingungen) die eingegebene Zeit abgelaufen ist.

Füllgeschwindigkeit

0.01 ... 166.00 mL/min, [maximal] (Titrande)

0.01 ... 150.00 mL/min, [maximal] (Titrino)

Geschwindigkeit, mit der nach der Titration die Bürette gefüllt werden soll.
Die maximale Füllgeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Potentiometrische Auswertung

Befehlsname

25 Zeichen, [DET pH #]

Name des Befehls.

Parameter für die potentiometrische Auswertung der Titrationskurve mit automatischer Äquivalenzpunkterkennung. Dabei kann eine der drei folgenden Auswertungsmethoden ausgewählt werden:

Auswertung ohne Fenster

[ein], aus

Mit dieser Option werden die beiden folgenden Parameter auf den ganzen Bereich der Titrationskurve angewendet.

EP-Kriterium

0 ... [5] ... 200

Kriterium für die Anerkennung von Endpunkten. Endpunkte, deren gefundener ERC-Wert kleiner ist als der hier eingegebene Wert werden nicht anerkannt.

EP-Anerkennung

Filter für die Anerkennung von Endpunkten:

[alle]

Alle Endpunkte werden anerkannt.

erster (nur Titrande)

Nur der erste gefundene Endpunkt wird anerkannt.

grösster

Nur der Endpunkt mit dem grössten ERC, d.h. dem steilsten Sprung wird anerkannt.

letzter

Nur der letzte gefundene Endpunkt wird anerkannt.

steigend (nur Titrande)

Nur Endpunkte mit positiver Steigung der Titrationskurve werden anerkannt.

fallend (nur Titrande)

Nur Endpunkte mit negativer Steigung der Titrationskurve werden anerkannt.

aus

Die Endpunkterkennung wird ausgeschaltet.

Auswertung mit Messwertfenster (pH)

	Untere Grenze pH	Obere Grenze pH	EP-Kriterium	EP-Anerkennung
1	-20.000	0.000	5	erster
2	0.000	20.000	3	steigend

ein, [aus]

Mit dieser Option können auf der Messwertachse bis zu 9 Bereiche (Fenster) definiert werden. Endpunkte werden nur anerkannt, wenn sie innerhalb dieser Fenster liegen und zusätzlich die pro Fenster definierten Parameter erfüllen. Pro Fenster wird nur ein Endpunkt anerkannt. Die definierten Fenster mit ihren Parametern werden in der Fenstertabelle angezeigt und können mit den folgenden Schaltflächen editiert werden:

Neu

Öffnen des Dialogfensters **Messwertfenster #** (siehe unten), in dem die Parameter für ein neues Fenster eingegeben werden können.

Eigenschaften

Öffnen des Dialogfensters **Messwertfenster #** (siehe unten), in dem die Parameter für das ausgewählte Fenster bearbeitet werden können.

Löschen

Löschen des in der Tabelle ausgewählten Fensters.

EP-Kriterium

0 ... [5] ... 200 (nur Titrimo)

Kriterium für die Anerkennung von Endpunkten, das für alle Fenster gilt. Endpunkte, deren gefundener ERC-Wert kleiner ist als der hier eingegebene Wert werden nicht anerkannt.

Messwertfenster (pH)

Messwertfenster sind definierte Teilbereiche (Fenster) auf der Messwertachse, für die unterschiedliche Parameter für die potentiometrische Auswertung definiert werden können. Endpunkte werden nur anerkannt, wenn sie innerhalb dieser Fenster liegen und zusätzlich die pro Fenster definierten Parameter erfüllen. Pro Fenster wird nur ein Endpunkt anerkannt.

Untere Grenze pH

[-20.000] ... 20.000

Untere Grenze für das Messwertfenster.

Obere Grenze pH

-20.000 ... [20.000]

Obere Grenze für das Messwertfenster.

EP-Kriterium

0 ... [5] ... 200 (nur Titrand)

Kriterium für die Anerkennung von Endpunkten. Endpunkte, deren gefundener ERC-Wert kleiner ist als der hier eingegebene Wert werden nicht anerkannt.

EP-Anerkennung

Filter für die Anerkennung von Endpunkten (nur Titrand):

erster

Nur der erste gefundene Endpunkt wird anerkannt.

grösster

Nur der Endpunkt mit dem grössten ERC, d.h. dem steilsten Sprung wird anerkannt.

letzter

Nur der letzte gefundene Endpunkt wird anerkannt.

steigend

Nur Endpunkte mit positiver Steigung der Titrationskurve werden anerkannt.

fallend

Nur Endpunkte mit negativer Steigung der Titrationskurve werden anerkannt.

Auswertung mit Volumenfenster (mL)

Befehlsname: DET pH 4

Tab: Allgemein/Hardware | Startbedingungen | Titrationsparameter | Abbruchbedingungen

Unter: Potentiometrische Auswertung | Weitere Auswertungen | Weitere Messwerte

☐ Auswertung ohne Fenster
☐ Auswertung mit Messwertfenster (pH)
☒ Auswertung mit Volumenfenster (mL)

	Untere Grenze mL	Obere Grenze mL	EP-Kriterium	EP-Anerkennung
1	0	3	5	grösster
2	3.00000	10	3	erster

Buttons: Neu, Eigenschaften, Löschen, OK, Abbrechen

ein, [aus] (nur Titrand)

Mit dieser Option können auf der Volumenachse bis zu 9 Bereiche (Fenster) definiert werden. Endpunkte werden nur anerkannt, wenn sie innerhalb dieser Fenster liegen und zusätzlich die pro Fenster definierten Parameter erfüllen. Pro Fenster wird nur ein Endpunkt anerkannt. Die definierten Fenster mit ihren Parametern werden in der Fenstertabelle angezeigt und können mit den folgenden Schaltflächen editiert werden:

Neu

Öffnen des Dialogfensters **Volumenfenster #** (siehe unten), in dem die Parameter für ein neues Fenster eingegeben werden können.

Eigenschaften

Öffnen des Dialogfensters **Volumenfenster #** (siehe unten), in dem die Parameter für das ausgewählte Fenster bearbeitet werden können.

Löschen

Löschen des in der Tabelle ausgewählten Fensters.

Volumenfenster (mL)

Volumenfenster sind definierte Teilbereiche (Fenster) auf der Volumenachse, für die unterschiedliche Parameter für die potentiometrische Auswertung definiert werden können. Endpunkte werden nur anerkannt, wenn sie innerhalb dieser Fenster liegen und zusätzlich die pro Fenster definierten Parameter erfüllen. Pro Fenster wird nur ein Endpunkt anerkannt.

Untere Grenze

[0.00000] ... 9999.99 mL (nur Titrand)

Untere Grenze für das Volumenfenster.

Obere Grenze

0.00000 ... [9999.99] mL (nur Titrand)

Obere Grenze für das Volumenfenster.

EP-Kriterium

0 ... [5] ... 200 (nur Titrand)

Kriterium für die Anerkennung von Endpunkten. Endpunkte, deren gefundener ERC-Wert kleiner ist als der hier eingegebene Wert werden nicht anerkannt.

EP-Anerkennung

Filter für die Anerkennung von Endpunkten (nur Titrand):

erster

Nur der erste gefundene Endpunkt wird anerkannt.

grösster

Nur der Endpunkt mit dem grössten ERC, d.h. dem steilsten Sprung wird anerkannt.

letzter

Nur der letzte gefundene Endpunkt wird anerkannt.

steigend

Nur Endpunkte mit positiver Steigung der Titrationskurve werden anerkannt.

fallend

Nur Endpunkte mit negativer Steigung der Titrationskurve werden anerkannt.

Weitere Auswertungen

Befehlsname
25 Zeichen, [DET pH #]
Name des Befehls.

Hier können die folgenden zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven eingeschaltet und definiert werden:

Fix-Endpunkt-Auswertung

ein, [aus]

Zu einer fixen Grösse (Messwert, Volumen oder Zeit) werden für den Fix-Endpunkt aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert.

Fixe Messgröße

[Messwert], Zeit, Volumen

Auswahl der fixen Messgröße, zu der aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert werden.

Fix-EP# bei pH

-20.000 ... 20.000, [aus]

Fix-Endpunkt 1...9 für **Fixe Messgröße** = **Messwert**.

Fix-EP# bei

0.0 ... 999999.9 s, [aus]

Fix-Endpunkt 1...9 für **Fixe Messgröße** = **Zeit**.

Fix-EP# bei

0.00000 ... 9999.99 mL, [aus]

Fix-Endpunkt 1...9 für **Fixe Messgröße** = **Volumen**.

9 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden zusätzlich zu den immer vorhandenen Fix-EP1...3 auch die Fix-EP4...9 angezeigt.

Mit dieser Schaltfläche werden anstelle der Fix-EP1...9 nur noch die Fix-EP1...3 angezeigt.

pK/HNP-Auswertung

ein, [aus]

Mit dieser Auswertung wird der pK-Wert aus der Titrationskurve ermittelt, der dem pH-Wert am Halbneutralisationspunkt entspricht (*siehe Titrationsbefehle - Auswertung - pK-Wert und Halbneutralisationspotential*).

Minimum-Auswertung

ein, [aus]

Zum minimalen Messwert werden aus der Messpunktliste das zugehörige Volumen, die Zeit und die Temperatur interpoliert () (*siehe Titrationsbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.1 ... [1.0] ... 20.0 pH/mL

Die Auswertung des Minimums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Maximum-Auswertung

ein, [aus]

Zum maximalen Messwert werden aus der Messpunktliste das zugehörige Volumen, die Zeit und die Temperatur interpoliert (*siehe Titrationsbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.1 ... [1.0] ... 20.0 pH/mL

Die Auswertung des Maximums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Knickpunkt-Auswertung

ein, [aus] (nur Titrande)

Mit der Knickpunkt-Auswertung werden scharfe Richtungsänderungen in der Titrationskurve bestimmt (*siehe Titrationsbefehle - Auswertung - Knickpunkt-Auswertung*).

EP-Kriterium

0.0 ... [0.3] ... 1.0

Mass für die minimale Schärfe des Knicks. Je kleiner das EP-Kriterium gesetzt wird, desto mehr Knickpunkte werden gefunden. Da es sich um einen relativen Wert bezogen auf die Gesamtmesswertänderung handelt, können bei einem kleinen Messwertbereich schon kleine Messwertänderungen als Knick ausgewertet werden.

Steilheit

0.0 ... [0.9] ... 10.0

Minimale Differenz zwischen der Steilheit vor und nach dem Knickpunkt. Je kleiner die Differenz, desto mehr Knickpunkte werden gefunden.

Glättungsfaktor

2 ... [5] ... 20

Je höher der Glättungsfaktor, desto weniger Endpunkte werden gefunden.

Fenster

Messwert, Volumen, Zeit, [aus]

Auf der Messwertachse, auf der Volumenachse oder auf der Zeitachse kann ein Bereich (Fenster) definiert werden. Die Knickpunkt-Auswertung erfolgt nur im vorgegebenen Fenster. Es wird jeweils nur der erste Knickpunkt anerkannt, der innerhalb des gesetzten Fensters liegt.

Untere Grenze pH

[-20.000] ... 20.000 (für **Fenster = Messwert**)

Messwert für die untere Grenze des Fensters.

Untere Grenze

[0.00000] ... 9999.99 mL (für **Fenster = Volumen**)

[0] ... 999999 s (für **Fenster = Zeit**)

Volumen bzw. Zeit für die untere Grenze des Fensters.

Obere Grenze pH

-20.000 ... [20.000] (für **Fenster = Messwert**)

Messwert für die obere Grenze des Fensters.

Obere Grenze

0.00000 ... [9999.99] mL (für **Fenster = Volumen**)

0 ... [999999] s (für **Fenster = Zeit**)

Volumen bzw. Zeit für die obere Grenze des Fensters.

Weitere Messwerte

Befehlsname

25 Zeichen, [DET pH #]

Name des Befehls.

Hier können maximal 6 weitere Messwerte definiert werden, die zusammen mit den standardmässig vorhandenen Messwerten in zusätzlichen Messwertkolonnen gespeichert werden:

Zusätzliche berechnete Messwerte

ein, [aus]

Mit dieser Option können maximal 3 neue Messwerte aus bestehenden Messwerten berechnet und gespeichert werden, die unter der Bezeichnung **Berechnet 1...3** auch in Kurven dargestellt und als Variablen '**Befehlsname.CA1...3**' in Formeln verwendet werden können.

Öffnen des Dialogfensters **Berechneter Messwert #** (siehe unten), in dem die Parameter für den zusätzlichen Messwert eingegeben werden können.

Eigenschaften

Öffnen des Dialogfensters **Berechneter Messwert #** (siehe unten), in dem die Parameter für den zusätzlichen Messwert bearbeitet werden können.

Löschen

Löschen des in der Tabelle ausgewählten berechneten Messwertes.

Berechneter Messwert

Mit der Option **Zusätzliche berechnete Messwerte** können maximal 3 neue Messwerte aus bestehenden Messwerten berechnet und gespeichert werden, die unter der Bezeichnung **Berechnet 1...3** auch in Kurven dargestellt und als Variablen ***.CA1...3** in Formeln verwendet werden können.

Name

25 Zeichen, [Berechneter Messwert #]

Bezeichnung des berechneten Messwertes. Dieser Name wird für die Achsenbeschriftung verwendet.

Formel

1000 Zeichen, ['leer']

Berechnungsformel für den berechneten Messwert, die entweder direkt eingegeben oder nach Drücken auf  mit dem Formeleditor erstellt werden kann.

Einheit

16 Zeichen, ['leer']

Einheit des berechneten Messwertes.

Dezimalstellen

0 ... [2] ... 5

Anzahl Dezimalstellen, mit denen der berechnete Messwert angezeigt werden soll.

Kommentar

250 Zeichen, ['leer']

Kommentar zum berechneten Messwert.

Zusätzliche externe Messwerte

ein, [aus]

Mit dieser Option können maximal 3 neue Messwerte aus weiteren Messbefehlen (z. B. **MEAS**) übernommen und gespeichert werden, die unter der Bezeichnung **Extern 1...3** auch in Kurven dargestellt und als Variablen **'Befehlsname.EX1...3'** in Formeln verwendet werden können.

Neu

Öffnen des Dialogfensters **Externer Messwert #** (siehe unten), in dem die Parameter für den externen Messwert eingegeben werden können.

Eigenschaften

Öffnen des Dialogfensters **Externer Messwert #** (siehe unten), in dem die Parameter für den externen Messwert bearbeitet werden können.

Löschen

Löschen des in der Tabelle ausgewählten externen Messwertes.

Externer Messwert

Mit der Option **Zusätzliche externe Messwerte** können maximal 3 neue Messwerte aus weiteren Messbefehlen (z.B. **MEAS**) übernommen und gespeichert werden, die unter der Bezeichnung **Extern 1...3** auch in Kurven dargestellt und als Variablen ***.EX1...3** in Formeln verwendet werden können.

Befehl

Auswahl aus vorhandenen Messbefehlen

Auswahl des Befehls, von dem der zusätzliche Messwert übernommen werden soll.

Messgröße

Auswahl aus vorhandenen Messgrößen

Auswahl der Messgröße aus dem Messbefehl, die als zusätzlicher Messwert übernommen werden soll.

Einheit

Anzeige der Einheit des externen Messwertes.

Kommentar

250 Zeichen, ['leer']

Kommentar zum externen Messwert.

DET U

Befehl für **Dynamische Äquivalenzpunkt-Titrationsen** mit potentiometrischer Spannungsmessung.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **DET** verfügen:

Titrimo: 716, 721, 736, 751, 785, 794, 798, 799

Titrando: 808, 809, 835, 836

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

DET U
DET U 1

Parameter

Die Parameter für den Befehl **DET U** werden auf den folgenden 7 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Dosierer, Sensor und Rührer.
- **Startbedingungen**
Parameter für die Messung des Initialmesswertes sowie Definition der Bedingungen, die beim Start der Titration erfüllt sein müssen.
- **Titrationparameter**
Parameter für Ablauf der Titration.
- **Abbruchbedingungen**
Definition der Bedingungen, die den Abbruch der Titration bewirken.
- **Potentiometrische Auswertung**
Parameter für die potentiometrische Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Auswertungen**
Definition von zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten von anderen Messbefehlen, die als zusätzliche Messwertkolonnen gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

The screenshot shows the 'DET U - DET U 5' configuration window with the 'Allgemein/Hardware' tab selected. The window contains the following fields and options:

- Befehlsname:** DET U 5
- Gerät:**
 - Gerätename: nicht definiert
 - Gerätetyp: Titrande
- Dosierer:**
 - Dosierer: 1
 - Lösung: nicht definiert
- Sensor:**
 - Messeingang: 1
 - Sensor: Metal electrode
 - Temperaturmessung: automatisch
- Rührer:**
 - Rührer: 1
 - Rührgeschwindigkeit: 8
- ☒ Automatisch ausschalten

Buttons at the bottom: OK, Abbrechen.

Befehlsname
25 Zeichen, [DET U #]
 Name des Befehls.

Gerät

Gerätename
Gerätename, [nicht definiert]
 Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp
Gerätetypen, [Titrando]
 Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.
 Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Dosierer

Dosierer
[1] ... 4 (Titrando)
[intern D0] (Titrino)
extern D1, extern D2 (nur Titrino 736, 751, 758, 799)
 Auswahl der Nummer des Dosierers (Wechsel- oder Dosiereinheit), mit dem die Lösung dosiert werden soll.

Lösung
24 Zeichen, Lösungsnamen, [nicht definiert]
 Eingabe eines Lösungsnamens oder Auswahl eines Titriermittels aus den in der Lösungstabelle vorhandenen Lösungen. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. Wenn intelligente Wechsel- bzw. Dosiereinheiten verwendet werden, wird im Methodenablauf überprüft, ob die richtige Lösung auf dem gewählten Dosierer aufgesetzt ist und ob der Dosierertyp übereinstimmt. Für nicht-intelligente Wechsel- bzw. Dosiereinheiten wird nur das Zylindervolumen überprüft. Für das gewählte Titriermittel werden beim Start der Titration die Nutzungsdauer, die Gültigkeit des Titors und das GLP-Testintervall überprüft. Ist **nicht definiert** ausgewählt, werden keine Tests durchgeführt.

Sensor

Messeingang
[1] ... 2 (Titrando)
[1] ... 2, diff. (Titrino)
 Auswahl des Messeinganges, an dem der Sensor angeschlossen ist.

Sensor
Sensorname, pH electrode, [Metal electrode], ISE electrode, Conductivity sensor
 Auswahl einer Elektrode aus den in der Sensortabelle vorhandenen Elektroden. Für pH- und ISE-Elektroden werden die Kalibrierdaten für den Sensor übernommen.

Temperaturmessung
 Art der Temperaturmessung (nur Titrando):
kontinuierlich
 Es muss ein Temperaturfühler angeschlossen sein. Die Temperatur wird dann laufend gemessen

[automatisch]

Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist, wird die Temperatur laufend gemessen. Ansonsten wird die unter **Temperatur** (Registerkarte **Titrationparameter**) manuell eingetragene Temperatur verwendet.

aus

Die Temperatur wird nicht gemessen. Die unter **Temperatur** (siehe *Titrationparameter*) manuell eingetragene Temperatur wird verwendet.

Rührer

Rührer

[1] ... 4, **aus** (nur Titrand)

Auswahl des Rührers. **aus** bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.

Rührgeschwindigkeit

-15 ... [8] ... 15 (nur Titrand)

Einstellen der Rührgeschwindigkeit. Mit dem Vorzeichen der Rührgeschwindigkeit ändert sich die Richtung, in der gerührt wird.

Automatisch ausschalten

[ein], **aus** (nur Titrand)

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Automatisch ein-/ausschalten

[ein], **aus** (nur Titrand 751, 785, 798, 799)

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer beim Start des Befehles automatisch eingeschaltet und am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Startbedingungen

DET U - DET U 5

Befehlsname: DET U 5

Potentiometrische Auswertung | Weitere Auswertungen | Weitere Messwerte

Allgemein/Hardware | **Startbedingungen** | Titrationsparameter | Abbruchbedingungen

Initialmesswert

Messwertdrift: aus mV/min

Min. Wartezeit: 0 s

Max. Wartezeit: 1 s

Startvolumen

Startvolumen: 0 mL

Dosiergeschwindigkeit: maximal mL/min

Startmesswert

Startmesswert: aus mV

Dosiergeschwindigkeit: 5 mL/min

Startsteigung

Startsteigung: aus mV/mL

Dosiergeschwindigkeit: 5 mL/min

Pause

Pause: 0 s

OK Abbrechen

Befehlsname

25 Zeichen, [DET U #]

Name des Befehls.

Die Startbedingungen werden in der aufgeführten Reihenfolge abgearbeitet, bevor die Titration gestartet wird.

Initialmesswert

Vor dem Abarbeiten der übrigen Startbedingungen wird der Initialmesswert bestimmt. Die Messwertübernahme ist von den drei folgenden Parametern abhängig:

Messwertdrift

0.1 ... 999.0 mV/min, [aus] (nur Titrand)

Der Messwert wird erst übernommen, wenn die Messwertdrift den hier angegebenen Wert unterschreitet. **aus** bedeutet, dass die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit erfolgt.

Min. Wartezeit

[0] ... 999999 s (nur Titrand)

Die minimale Wartezeit ist nur für driftkontrollierte Messungen von Bedeutung. Die Messwertübernahme erfolgt erst nach Ablauf der minimalen Wartezeit, auch wenn die Messwertdrift schon erreicht ist. Während des Ablaufs der minimalen Wartezeit wird die Drift weiterhin kontrolliert.

Max. Wartezeit

0 ... [1] ... 999999 s (nur Titrand)

Wenn die Messwertdrift ausgeschaltet oder noch nicht erreicht ist, erfolgt die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit.

Startvolumen

Startvolumen

[0.0000] ... 9999.99 mL (Titrand)

[0.000] ... 999.99 mL (Titrino)

Volumen, das vor dem Start der Titration mit der angegebenen Dosiergeschwindigkeit zudosiert werden soll.

Dosiergeschwindigkeit

0.01 ... 166.00 mL/min, [maximal] (Titrand)

0.01 ... 150.00 mL/min, [maximal] (Titrino)

Geschwindigkeit, mit der das Startvolumen dosiert werden soll. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Startmesswert

Startmesswert

-2000.0 ... 2000.0 mV, [aus] (nur Titrand)

Wird der Startmesswert erreicht, wird die Vordosierung abgebrochen und die nächste Startbedingung abgearbeitet, bzw. die Titration gestartet. Wenn mit der Dosierung eines Startvolumens der Startmesswert bereits erreicht ist, wird direkt die Titration gestartet.

Dosiergeschwindigkeit

0.01 ... [5.00] ... 166.00 mL/min, maximal (nur Titrand)

Geschwindigkeit, mit der zudosiert wird, bis der Startmesswert erreicht ist. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Startsteigung

Startsteigung

0 ... 999 mV/mL, [aus] (nur Titrand)

Wird die Startsteigung erreicht, wird die Vordosierung abgebrochen und die Titration gestartet. Wenn mit der Dosierung eines Startvolumens die Startsteigung bereits erreicht ist, wird direkt die Titration gestartet.

Dosiergeschwindigkeit

0.01 ... [5.00] ... 166.00 mL/min, maximal (nur Titrand)

Geschwindigkeit, mit der zudosiert wird, bis die Startsteigung erreicht ist. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Pause

Pause

[0] ... 999999 s

Wartezeit, z.B. zum Einschwingen der Elektrode nach dem Start oder Reaktionszeit nach dem Dosieren eines Startvolumens. Die Pause läuft am Ende aller Startbedingungen ab.

Titrationsparameter

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Titrationsparameter*

Abbruchbedingungen

Befehlsname

25 Zeichen, [DET U #]

Name des Befehls.

Bedingungen für den Abbruch der Titration. Sind mehrere Abbruchbedingungen gesetzt, führt dasjenige Kriterium zum Abbruch der Titration, das zuerst erreicht wird.

Stoppvolumen

0.00000 ... [100.000] ... 9999.99 mL, aus (Titrande)

0.000 ... [100.000] ... 9999.99 mL, aus (Titrino)

Abbruch, wenn seit dem Start der Titration (einschliesslich Startbedingungen) das eingegebene Volumen dosiert wurde. Passen Sie das Stoppvolumen dem Probeneinmass oder der Grösse Ihres Titriergefässes an.

Stoppmesswert

-2000.0 ... 2000.0 mV, [aus] (Titrande)

-2000 ... 2000 mV, [aus] (Titrino)

Abbruch, wenn seit dem Start der Titration der eingegebene Messwert für einen Messpunkt über- bzw. unterschritten wurde.

Stopp EP

1 ... [9], aus

Abbruch, wenn die eingegebene Anzahl Äquivalenzpunkte gefunden wurde.

Volumen nach EP

0.0100 ... 9999.99 mL, [aus] (nur Titrande)

Wenn die unter **Stopp EP** eingegebene Anzahl Äquivalenzpunkte gefunden wurde, wird dieses Volumen dosiert. So sieht man auch den Kurvenverlauf nach Erreichen des Endpunktes.

Stopzeit

0 ... 999999 s, [aus] (nur Titrand)

Abbruch, wenn nach dem Start der Titration (einschliesslich Startbedingungen) die eingegebene Zeit abgelaufen ist.

Füllgeschwindigkeit

0.01 ... 166.00 mL/min, [maximal] (Titrand)

0.01 ... 150.00 mL/min, [maximal] (Titrino)

Geschwindigkeit, mit der nach der Titration die Bürette gefüllt werden soll. Die maximale Füllgeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Potentiometrische Auswertung

DET U - DET U 5

Befehlsname: DET U 5

Algemein/Hardware | Startbedingungen | Titrationsparameter | Abbruchbedingungen

Potentiometrische Auswertung | Weitere Auswertungen | Weitere Messwerte

☐ Auswertung ohne Fenster

☒ Auswertung mit Messwertfenster (U)

	Untere Grenze mV	Obere Grenze mV	EP-Kriterium	EP-Anerkennung
1	-2000.0	00.0	5	erster
2	0.0	2000.0	3	grösster

☐ Auswertung mit Volumenfenster (mL)

Neu Eigenschaften Löschen

OK Abbrechen

Befehlsname

25 Zeichen, [DET U #]

Name des Befehls.

Parameter für die potentiometrische Auswertung der Titrationskurve mit automatischer Äquivalenzpunkterkennung. Dabei kann eine der drei folgenden Auswertungsmethoden ausgewählt werden:

Auswertung ohne Fenster

Parameter: siehe DET pH - Potentiometrische Auswertung

Auswertung mit Messwertfenster (U)

ein, [aus]

Mit dieser Option können auf der Messwertachse bis zu 9 Bereiche (Fenster) definiert werden. Endpunkte werden nur anerkannt, wenn sie innerhalb dieser Fenster liegen und zusätzlich die pro Fenster definierten Parameter erfüllen. Pro Fenster wird nur ein Endpunkt anerkannt. Die definierten Fenster mit ihren Parametern werden in der Fenstertabelle angezeigt und können mit den folgenden Schaltflächen editiert werden:

Neu

Öffnen des Dialogfensters **Messwertfenster #** (siehe unten), in dem die Parameter für ein neues Fenster eingegeben werden können.

Eigenschaften

Öffnen des Dialogfensters **Messwertfenster #** (siehe unten), in dem die Parameter für das ausgewählte Fenster bearbeitet werden können.

Löschen

Löschen des in der Tabelle ausgewählten Fensters.

EP-Kriterium

0 ... [5] ... 200 (nur Titrino)

Kriterium für die Anerkennung von Endpunkten, das für alle Fenster gilt. Endpunkte, deren gefundener ERC-Wert kleiner ist als der hier eingegebene Wert werden nicht anerkannt.

Messwertfenster (U)

Messwertfenster sind definierte Teilbereiche (Fenster) auf der Messwertachse, für die unterschiedliche Parameter für die potentiometrische Auswertung definiert werden können. Endpunkte werden nur anerkannt, wenn sie innerhalb dieser Fenster liegen und zusätzlich die pro Fenster definierten Parameter erfüllen. Pro Fenster wird nur ein Endpunkt anerkannt.

Untere Grenze

[-2000.0] ... 2000.0 mV (Titrand)

[-2000] ... 2000 mV (Titrino)

Untere Grenze für das Messwertfenster.

Obere Grenze

-2000.0 ... [2000.0] mV (Titrand)

-2000 ... [2000] mV (Titrino)

Obere Grenze für das Messwertfenster.

EP-Kriterium

0 ... [5] ... 200

Kriterium für die Anerkennung von Endpunkten. Endpunkte, deren gefundener ERC-Wert kleiner ist als der hier eingegebene Wert werden nicht anerkannt.

EP-Anerkennung

Filter für die Anerkennung von Endpunkten (nur Titrand):

erster

Nur der erste gefundene Endpunkt wird anerkannt.

grösster

Nur der Endpunkt mit dem grössten ERC, d.h. dem steilsten Sprung wird anerkannt.

letzter

Nur der letzte gefundene Endpunkt wird anerkannt.

steigend

Nur Endpunkte mit positiver Steigung der Titrationskurve werden anerkannt.

fallend

Nur Endpunkte mit negativer Steigung der Titrationskurve werden anerkannt.

Auswertung mit Volumenfenster (mL)

Abbildung und Parameter: siehe DET pH - Potentiometrische Auswertung

Weitere Auswertungen

Befehlsname

25 Zeichen, [DET U #]

Name des Befehls.

Hier können die folgenden zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven eingeschaltet und definiert werden:

Fix-Endpunkt-Auswertung

ein, [aus]

Zu einer fixen Größe (Messwert, Volumen oder Zeit) werden für den Fix-Endpunkt aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Größen interpoliert.

Fixe Messgröße

[Messwert], Zeit, Volumen

Auswahl der fixen Messgröße, zu der aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Größen interpoliert werden.

Fix-EP# bei

-2000.0 ... 2000.0 mV, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgröße** = **Messwert**.

Fix-EP# bei

0.0 ... 999999.9 s, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgröße** = **Zeit**.

Fix-EP# bei

0.00000 ... 9999.99 mL, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgröße** = **Volumen**.

9 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden zusätzlich zu den immer vorhandenen Fix-EP1...3 auch die Fix-EP4...9 angezeigt.

Mit dieser Schaltfläche werden anstelle der Fix-EP1...9 nur noch die Fix-EP1...3 angezeigt.

pK/HNP-Auswertung

ein, [aus]

Mit dieser Auswertung wird der pK-Wert aus der Titrationskurve ermittelt, der dem pH-Wert am Halbneutralisationspunkt entspricht (*siehe Titrationsbefehle - Auswertung - pK-Wert und Halbneutralisationspotential*).

Minimum-Auswertung

ein, [aus]

Zum minimalen Messwert werden aus der Messpunktliste das zugehörige Volumen, die Zeit und die Temperatur interpoliert () (*siehe Titrationsbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

1.0 ... [25.0] ... 2000.0 mV/mL

Die Auswertung des Minimums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Maximum-Auswertung

ein, [aus]

Zum maximalen Messwert werden aus der Messpunktliste das zugehörige Volumen, die Zeit und die Temperatur interpoliert () (*siehe Titrationsbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

1.0 ... [25.0] ... 2000.0 mV/mL

Die Auswertung des Maximums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Knickpunkt-Auswertung

ein, [aus] (nur Titrande)

Mit der Knickpunkt-Auswertung werden scharfe Richtungsänderungen in der Titrationskurve bestimmt (*siehe Titrationsbefehle - Auswertung - Knickpunkt-Auswertung*).

EP-Kriterium

0 ... [0.3] ... 1.0

Mass für die minimale Schärfe des Knicks. Je kleiner das EP-Kriterium gesetzt wird, desto mehr Knickpunkte werden gefunden. Da es sich um einen relativen Wert bezogen auf die Gesamtmesswertänderung handelt, können bei einem kleinen Messwertbereich schon kleine Messwertänderungen als Knick ausgewertet werden.

Steilheit

0.0 ... [0.9] ... 10.0

Minimale Differenz zwischen der Steilheit vor und nach dem Knickpunkt. Je kleiner die Differenz, desto mehr Knickpunkte werden gefunden.

Glättungsfaktor

2 ... [5] ... 20

Je höher der Glättungsfaktor, desto weniger Endpunkte werden gefunden.

Fenster

Messwert, Volumen, Zeit, [aus]

Auf der Messwertachse, auf der Volumenachse oder auf der Zeitachse kann ein Bereich (Fenster) definiert werden. Die Knickpunkt-Auswertung erfolgt nur im vorgegebenen Fenster. Es wird jeweils nur der erste Knickpunkt anerkannt, der innerhalb des gesetzten Fensters liegt.

Untere Grenze

[-2000.0] ... 2000.0 mV (für **Fenster** = **Messwert**)
 [0.00000] ... 9999.99 mL (für **Fenster** = **Volumen**)
 [0] ... 999999 s (für **Fenster** = **Zeit**)

Wert für die untere Grenze des Fensters.

Obere Grenze

-2000.0 ... [2000.0] mV (für **Fenster** = **Messwert**)
 0.00000 ... [9999.99] mL (für **Fenster** = **Volumen**)
 0 ... [999999] s (für **Fenster** = **Zeit**)

Wert für die obere Grenze des Fensters.

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Weitere Messwerte*

DET Ipol

Befehl für **Dynamische Äquivalenzpunkt-Titrationsen** mit voltametrischer Messung (wählbarer Polarisationsstrom).

Geräte


Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **DET** verfügen:

Titrimo: 716, 721, 736, 751, 785, 794, 798, 799

Titrand: 808, 809, 835, 836

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

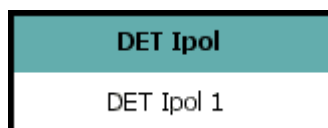

Parameter

Die Parameter für den Befehl **DET Ipol** werden auf den folgenden 7 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Dosierer, Sensor und Rührer.
- **Startbedingungen**
Parameter für die Messung des Initialmesswertes sowie Definition der Bedingungen, die beim Start der Titration erfüllt sein müssen.
- **Titrationparameter**
Parameter für Ablauf der Titration.
- **Abbruchbedingungen**
Definition der Bedingungen, die den Abbruch der Titration bewirken.
- **Potentiometrische Auswertung**
Parameter für die potentiometrische Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Auswertungen**
Definition von zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten von anderen Messbefehlen, die als zusätzliche Messwertkolonnen gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

DET Ipol - DET Ipol 6

Befehlsname: DET Ipol 6

Potentiometrische Auswertung | Weitere Auswertungen | Weitere Messwerte

Allgemein/Hardware | Startbedingungen | Titrationsparameter | Abbruchbedingungen

Gerät

Gerätegruppe: nicht definiert

Gerätetyp: Titrande

Dosierer

Dosierer: 1

Lösung: nicht definiert

Sensor

Messeingang: 1

Sensor: Metal electrode

I(pol): 5.0 µA

☐ Elektrodentest

Temperaturmessung: automatisch

Rührer

Rührer: 1

Rührgeschwindigkeit: 8

☒ Automatisch ausschalten

OK Abbrechen

Befehlsname

25 Zeichen, [DET Ipol #]

Name des Befehls.

Hier werden die allgemeinen Parameter zum Gerät, Dosierer, Sensor und Rührer eingestellt.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [Titrande]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Dosierer

Dosierer

[1] ... 4 (Titrande)

[intern D0] (Titrino)

extern D1, extern D2 (nur Titrino 736, 751, 758, 799)

Auswahl der Nummer des Dosierers (Wechsel- oder Dosiereinheit), mit dem die Lösung dosiert werden soll.

Lösung

24 Zeichen, Lösungsnamen, [nicht definiert]

Eingabe eines Lösungsnamens oder Auswahl eines Titriermittels aus den in der Lösungstabelle vorhandenen Lösungen. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. Wenn intelligente Wechsel- bzw. Dosiereinheiten verwendet werden, wird im Methodenablauf überprüft, ob die richtige Lösung auf dem gewählten Dosierer aufgesetzt ist und ob der Dosierertyp übereinstimmt. Für nicht-intelligente Wechsel- bzw. Dosiereinheiten wird nur das Zylindervolumen überprüft. Für das gewählte Titriermittel werden beim Start der Titration die Nutzungsdauer, die Gültigkeit des Titors und das GLP-Testintervall überprüft. Ist **nicht definiert** ausgewählt, werden keine Tests durchgeführt.

Sensor

Messeingang

[1] ... 2 (Titrande)

[1] ... 2, diff. (Titrino)

Auswahl des Messeinganges, an dem der Sensor angeschlossen ist.

Sensor

Sensorname, [Metal electrode], Conductivity sensor

Auswahl einer Elektrode aus den in der Sensortabelle vorhandenen Elektroden.

I(pol)

-125.0 ... [5.0] ... 125.0 μA (Titrande, Schrittweite 2.5 μA)

-127 ... [5] ... 127 μA (Titrino, Schrittweite 1 μA)

Der Polarisationsstrom ist der Strom, der während einer voltametrischen Messung an einer polarisierten Elektrode angelegt wird.

Elektrodentest

ein, [aus]

Ein-/ausschalten des Elektrodentests für polarisierte Elektroden. Dieser Test wird beim Übergang vom inaktiven Grundzustand in eine Messung durchgeführt.

Temperaturmessung

Art der Temperaturmessung (nur Titrande):

kontinuierlich

Es muss ein Temperaturfühler angeschlossen sein. Die Temperatur wird dann laufend gemessen.

[automatisch]

Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist, wird die Temperatur laufend gemessen. Ansonsten wird die unter **Temperatur** (Registerkarte **Titrationparameter**) manuell eingetragene Temperatur verwendet.

aus

Die Temperatur wird nicht gemessen. Die unter **Temperatur** (siehe *Titrationparameter*) manuell eingetragene Temperatur wird verwendet.

Rührer

Rührer

[1] ... 4, aus (nur Titrande)

Auswahl des Rührers. **aus** bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.

Rührgeschwindigkeit

-15 ... [8] ... 15 (nur Titrande)

Einstellen der Rührgeschwindigkeit. Mit dem Vorzeichen der Rührgeschwindigkeit ändert sich die Richtung, in der gerührt wird.

Automatisch ausschalten

[ein], aus (nur Titrande)

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Automatisch ein-/ausschalten

[ein], aus (nur Titrino 751, 785, 798, 799)

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer beim Start des Befehles automatisch eingeschaltet und am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Startbedingungen

Abbildung und Parameter: siehe DET U - Startbedingungen

Titrationparameter

Abbildung und Parameter: siehe DET pH - Titrationsparameter

Abbruchbedingungen

Abbildung und Parameter: siehe DET U - Abbruchbedingungen

Potentiometrische Auswertung

Befehlsname

25 Zeichen, [DET Ipol #]

Name des Befehls.

Parameter für die potentiometrische Auswertung der Titrationskurve mit automatischer Äquivalenzpunkterkennung. Dabei kann eine der drei folgenden Auswertungsmethoden ausgewählt werden:

Auswertung ohne Fenster

Parameter: siehe DET pH - Potentiometrische Auswertung

Auswertung mit Messwertfenster (Ipol)

Abbildung und Parameter: siehe DET pH - Potentiometrische Auswertung

Auswertung mit Volumenfenster (mL)

Abbildung und Parameter: siehe DET pH - Potentiometrische Auswertung

Weitere Auswertungen

Befehlsname
25 Zeichen, [DET Ipol #]
 Name des Befehls.

Hier können die folgenden zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven eingeschaltet und definiert werden:

Fix-Endpunkt-Auswertung

ein, [aus]

Zu einer fixen Grösse (Messwert, Volumen oder Zeit) werden für den Fix-Endpunkt aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert.

Fixe Messgrösse
[Messwert], Zeit, Volumen

Auswahl der fixen Messgrösse, zu der aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert werden.

Fix-EP# bei
-2000.0 ... 2000.0 mV, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgrösse** = **Messwert**.

Fix-EP# bei
0.0 ... 999999.9 s, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgrösse** = **Zeit**.

Fix-EP# bei
0.00000 ... 9999.99 mL, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgrösse** = **Volumen**.

9 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden zusätzlich zu den immer vorhandenen Fix-EP1...3 auch die Fix-EP4...9 angezeigt.

3 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden anstelle der Fix-EP1...9 nur noch die Fix-EP1...3 angezeigt.

Minimum-Auswertung

ein, [aus]

Zum minimalen Messwert werden aus der Messpunktliste das zugehörige Volumen, die Zeit und die Temperatur interpoliert () (siehe *Titrationsebefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.1 ... [25.0] ... 2000.0 mV/mL

Die Auswertung des Minimums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Maximum-Auswertung

ein, [aus]

Zum maximalen Messwert werden aus der Messpunktliste das zugehörige Volumen, die Zeit und die Temperatur interpoliert () (siehe *Titrationsebefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.1 ... [25.0] ... 2000.0 mV/mL

Die Auswertung des Maximums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Knickpunkt-Auswertung

ein, [aus] (nur Titrande)

Mit der Knickpunkt-Auswertung werden scharfe Richtungsänderungen in der Titrationsebe bestimmt (siehe *Titrationsebefehle - Auswertung - Knickpunkt-Auswertung*).

EP-Kriterium

0 ... [0.3] ... 1.0

Mass für die minimale Schärfe des Knicks. Je kleiner das EP-Kriterium gesetzt wird, desto mehr Knickpunkte werden gefunden. Da es sich um einen relativen Wert bezogen auf die Gesamtmesswertänderung handelt, können bei einem kleinen Messwertbereich schon kleine Messwertänderungen als Knick ausgewertet werden.

Steilheit

0.0 ... [0.9] ... 10.0

Minimale Differenz zwischen der Steilheit vor und nach dem Knickpunkt. Je kleiner die Differenz, desto mehr Knickpunkte werden gefunden.

Glättungsfaktor

2 ... [5] ... 20

Je höher der Glättungsfaktor, desto weniger Endpunkte werden gefunden.

Fenster

Messwert, Volumen, Zeit, [aus]

Auf der Messwertachse, auf der Volumenachse oder auf der Zeitachse kann ein Bereich (Fenster) definiert werden. Die Knickpunktauswertung erfolgt nur im vorgegebenen Fenster. Es wird jeweils nur der erste Knickpunkt anerkannt, der innerhalb des gesetzten Fensters liegt.

Untere Grenze

[-2000.0] ... 2000.0 mV (für **Fenster** = **Messwert**)

[0.00000] ... 9999.99 mL (für **Fenster** = **Volumen**)

[0] ... 999999 s (für **Fenster** = **Zeit**)

Wert für die untere Grenze des Fensters.

Obere Grenze

-2000.0 ... [2000.0] mV (für **Fenster** = **Messwert**)

0.00000 ... [9999.99] mL (für **Fenster** = **Volumen**)

0 ... [999999] s (für **Fenster** = **Zeit**)

Wert für die obere Grenze des Fensters.

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Weitere Messwerte*

DET Upol

Befehl für **Dynamische Äquivalenzpunkt-Titrationen** mit amperometrische Messung (wählbare Polarisationsspannung).

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **DET** verfügen:

Titrimo: 716, 721, 736, 751, 785, 794, 798, 799

Titrando: 808, 809, 835, 836

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **DET Upol** werden auf den folgenden 7 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Dosierer, Sensor und Rührer.
- **Startbedingungen**
Parameter für die Messung des Initialmesswertes sowie Definition der Bedingungen, die beim Start der Titration erfüllt sein müssen.
- **Titrationsparameter**
Parameter für Ablauf der Titration.
- **Abbruchbedingungen**
Definition der Bedingungen, die den Abbruch der Titration bewirken.
- **Potentiometrische Auswertung**
Parameter für die potentiometrische Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Auswertungen**
Definition von zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten von anderen Messbefehlen, die als zusätzliche Messwertkolonnen gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

DET Upol - DET Upol 7

Befehlsname: DET Upol 7

Potentiometrische Auswertung | Weitere Auswertungen | Weitere Messwerte

Allgemein/Hardware | Startbedingungen | Titrationsparameter | Abbruchbedingungen

Gerät

Gerätegruppe: nicht definiert

Gerätetyp: Titrande

Dosierer

Dosierer: 1

Lösung: nicht definiert

Sensor

Messeingang: 1

Sensor: Metal electrode

U(pol): 400 mV

☐ Elektrodentest

Temperaturmessung: automatisch

Rührer

Rührer: 1

Rührgeschwindigkeit: 8

☒ Automatisch ausschalten

OK Abbrechen

Befehlsname

25 Zeichen, [DET Upol #]

Name des Befehls.

Hier werden die allgemeinen Parameter zum Gerät, Dosierer, Sensor und Rührer eingestellt.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [Titrande]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Dosierer

Dosierer

[1] ... 4 (Titrande)

[intern D0] (Titrino)

extern D1, extern D2 (nur Titrino 736, 751, 758, 799)

Auswahl der Nummer des Dosierers (Wechsel- oder Dosiereinheit), mit dem die Lösung dosiert werden soll.

Lösung

24 Zeichen, Lösungsnamen, [nicht definiert]

Eingabe eines Lösungsnamens oder Auswahl eines Titriermittels aus den in der Lösungstabelle vorhandenen Lösungen. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. Wenn intelligente Wechsel- bzw. Dosiereinheiten verwendet werden, wird im Methodenablauf überprüft, ob die richtige Lösung auf dem gewählten Dosierer aufgesetzt ist und ob der Dosierertyp übereinstimmt. Für nicht-intelligente Wechsel- bzw. Dosiereinheiten wird nur das Zylindervolumen überprüft. Für das gewählte Titriermittel werden beim Start der Titration die Nutzungsdauer, die Gültigkeit des Titors und das GLP-Testintervall überprüft. Ist **nicht definiert** ausgewählt, werden keine Tests durchgeführt.

Sensor

Messeingang

[1] ... 2 (Titrande)

[1] ... 2, diff. (Titrino)

Auswahl des Messeinganges, an dem der Sensor angeschlossen ist.

Sensor

Sensorname, [Metal electrode], Conductivity sensor

Auswahl einer Elektrode aus den in der Sensortabelle vorhandenen Elektroden.

U(pol)

-1250 ... [400] ... 1250 mV (Titrande, Schrittweite 25 mV)

-1270 ... [400] ... 1270 mV (Titrino, Schrittweite 10 mV)

Die Polarisierungsspannung ist die Spannung, die während einer amperometrischen Messung an einer polarisierten Elektrode angelegt wird.

Elektrodentest

ein, [aus]

Ein-/ausschalten des Elektrodentests für polarisierte Elektroden. Dieser Test wird beim Übergang vom inaktiven Grundzustand in eine Messung durchgeführt.

Temperaturmessung

Art der Temperaturmessung (nur Titrande):

kontinuierlich

Es muss ein Temperatursensor angeschlossen sein. Die Temperatur wird dann laufend gemessen.

[automatisch]

Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist, wird die Temperatur laufend gemessen. Ansonsten wird die unter **Temperatur** (Registerkarte **Titrationparameter**) manuell eingetragene Temperatur verwendet.

aus

Die Temperatur wird nicht gemessen. Die unter **Temperatur** (siehe *Titrationparameter*) manuell eingetragene Temperatur wird verwendet.

Rührer

Rührer

[1] ... 4, aus (nur Titrande)

Auswahl des Rührers. **aus** bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.

Rührgeschwindigkeit

-15 ... [8] ... 15 (nur Titrande)

Einstellen der Rührgeschwindigkeit. Mit dem Vorzeichen der Rührgeschwindigkeit ändert sich die Richtung, in der gerührt wird.

Automatisch ausschalten

[ein], aus (nur Titrande)

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Automatisch ein-/ausschalten

[ein], aus (nur Titrimo 751, 785, 798, 799)

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer beim Start des Befehles automatisch eingeschaltet und am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Startbedingungen

DET Upol - DET Upol 7

Befehlsname: DET Upol 7

Potentiometrische Auswertung | Weitere Auswertungen | Weitere Messwerte

Allgemein/Hardware | **Startbedingungen** | Titrationsparameter | Abbruchbedingungen

Initialmesswert

Messwertdrift: aus $\mu\text{A}/\text{min}$

Min. Wartezeit: 0 s

Max. Wartezeit: 1 s

Startvolumen

Startvolumen: 0 mL

Dosiergeschwindigkeit: maximal mL/min

Startmesswert

Startmesswert: aus μA

Dosiergeschwindigkeit: 5 mL/min

Startsteigung

Startsteigung: aus $\mu\text{A}/\text{mL}$

Dosiergeschwindigkeit: 5 mL/min

Pause

Pause: 0 s

OK Abbrechen

Befehlsname

25 Zeichen, [DET Upol #]

Name des Befehls.

Die Startbedingungen werden in der aufgeführten Reihenfolge abgearbeitet, bevor die Titration gestartet wird.

Initialmesswert

Vor dem Abarbeiten der übrigen Startbedingungen wird der Initialmesswert bestimmt. Die Messwertübernahme ist von den drei folgenden Parametern abhängig:

Messwertdrift

0.01 ... 99.90 $\mu\text{A}/\text{min}$, [aus] (nur Titrimo)

Der Messwert wird erst übernommen, wenn die Messwertdrift den hier eingegebenen Wert unterschreitet. **aus** bedeutet, dass die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit erfolgt.

Min. Wartezeit

[0] ... 999999 s (nur Titrimo)

Die minimale Wartezeit ist nur für driftkontrollierte Messungen von Bedeutung. Die Messwertübernahme erfolgt erst nach Ablauf der minimalen Wartezeit, auch wenn die Messwertdrift schon erreicht ist. Während des Ablaufs der minimalen Wartezeit wird die Drift weiterhin kontrolliert.

Max. Wartezeit

0 ... [1] ... 999999 s (nur Titrand)

Wenn die Messwertdrift ausgeschaltet oder noch nicht erreicht ist, erfolgt die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit.

Startvolumen

Startvolumen

[0.00000] ... 9999.99 mL (Titrand)

[0.000] ... 999.99 mL (Titrino)

Volumen, das vor dem Start der Titration mit der angegebenen Dosiergeschwindigkeit zudosiert werden soll.

Dosiergeschwindigkeit

0.01 ... 166.00 mL/min, [maximal] (Titrand)

0.01 ... 150.00 mL/min, [maximal] (Titrino)

Geschwindigkeit, mit der das Startvolumen dosiert werden soll. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Startmesswert

Startmesswert

-200.0 ... 200.0 μ A, [aus] (nur Titrand)

Wird der Startmesswert erreicht, wird die Vordosierung abgebrochen und die nächste Startbedingung abgearbeitet, bzw. die Titration gestartet. Wenn mit der Dosierung eines Startvolumens der Startmesswert bereits erreicht ist, wird direkt die Titration gestartet.

Dosiergeschwindigkeit

0.01 ... [5.00] ... 166.00 mL/min, maximal (nur Titrand)

Geschwindigkeit, mit der zudosiert wird, bis der Startmesswert erreicht ist. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Startsteigung

Startsteigung

0 ... 99 μ A/mL, [aus] (nur Titrand)

Wird die Startsteigung erreicht, wird die Vordosierung abgebrochen und die Titration gestartet. Wenn mit der Dosierung eines Startvolumens die Startsteigung bereits erreicht ist, wird direkt die Titration gestartet.

Dosiergeschwindigkeit

0.01 ... [5.00] ... 166.00 mL/min, maximal (nur Titrand)

Geschwindigkeit, mit der zudosiert wird, bis die Startsteigung erreicht ist. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Pause

Pause

[0] ... 999999 s

Wartezeit, z.B. zum Einschwingen der Elektrode nach dem Start oder Reaktionszeit nach dem Dosieren eines Startvolumens. Die Pause läuft am Ende aller Startbedingungen ab.

Titrationsparameter

Befehlsname

25 Zeichen, [DET Upol #]

Name des Befehls.

Parameter für den Ablauf der Titration.

Titrationsgeschwindigkeit

Titrationsgeschwindigkeit

Für die Titrationsgeschwindigkeit können die drei vordefinierten Parametersätze **langsam**, **optimal** und **schnell** gewählt werden, bei denen die Parameter für **Messwertübernahme** und **Dosieren der Inkremente** nicht angezeigt werden. Um diese Parameter editieren zu können, muss die Einstellung **Anwender** ausgewählt werden.

langsam

Für Titrationsen, bei denen auch kleinste Details sichtbar sein sollen. Allerdings kann dadurch auch das Rauschen verstärkt werden, was zu unerwünschten EPs führen kann.

[optimal]

Parametersatz für alle Standardtitrationen, für die häufigsten Anwendungen optimiert.

schnell

Für wenig kritische, schnelle Titrationsen.

Anwender

Anwenderdefinierte Einstellung der einzelnen Parameter, welche die Titrationsgeschwindigkeit beeinflussen.

Messwertübernahme

(wird nur für **Titrationsgeschwindigkeit** = **Anwender** angezeigt)

Messwertdrift

0.01 ... [20.00 (langsam)] ... [50.00 (optimal)] ... [80.00 (schnell)] ... 99.00
µA/min (Titrando)

0.05 ... [20.00 (langsam)] ... [50.00 (optimal)] ... [80.00 (schnell)] ... 99.00 $\mu\text{A}/\text{min}$ (Titrimo)

aus

Drift für die Messwertübernahme während der Titration. **aus** bedeutet, die Messwertübernahme erfolgt nach der maximalen Wartezeit.

Min. Wartezeit

[0 (langsam, optimal, schnell)] ... 999999 s (nur Titrimo)

Die minimale Wartezeit ist nur für driftkontrollierte Messungen von Bedeutung. Die Messwertübernahme erfolgt erst nach Ablauf der minimalen Wartezeit, auch wenn die Messwertdrift schon erreicht ist. Während des Ablaufs der minimalen Wartezeit wird die Drift weiterhin kontrolliert.

Max. Wartezeit

0 ... [38 (langsam)] ... [26 (optimal)] ... [21 (schnell)] ... 999999 s (Titrimo)

0 ... [38 (langsam)] ... [26 (optimal)] ... [21 (schnell)] ... 9999 s (Titrimo)

Wenn die Messwertdrift ausgeschaltet oder noch nicht erreicht ist, erfolgt die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit. Falls die Wartezeit nicht neu eingegeben wurde, wird automatisch eine zur Drift passende Wartezeit nach folgender Formel berechnet:

$$\text{Wartezeit} = 150 / \sqrt{\text{Drift} + 0.01} + 5$$

Dosieren der Inkremente

(wird nur für **Titrationsgeschwindigkeit** = **Anwender** angezeigt)

Messpunktdichte

0 ... [2 (langsam)] ... [4 (optimal)] ... [6 (schnell)] ... 9

Ein kleiner Wert bedeutet kleine Volumeninkremente, d.h. eine hohe Messpunktdichte. Die Kurve gibt dann alle feinsten Details wieder, was allerdings auch Rauschen bedeuten und zu unerwünschten Äquivalenzpunkten führen kann. Ein grosser Wert, d.h. eine kleine Messpunktdichte, erlaubt schnellere Titrationen. Wenn Sie mit kleinen Zylindervolumen beim Dosieren arbeiten, kann ein kleinerer Wert für die Messpunktdichte vorteilhaft sein. Gleichzeitig sollten aber eine kleinere Messwertdrift und ein höheres EP-Kriterium gesetzt werden.

Min. Inkrement

0.1 ... [10.0 (langsam, optimal)] ... [30.0 (schnell)] ... 999.9 μL (Titrimo)

0.0 ... [10.0 (langsam, optimal)] ... [30.0 (schnell)] ... 999.9 μL (Titrimo)

Dieses kleinste erlaubte Volumeninkrement wird zu Beginn der Titration und bei steilen Kurven im Bereich des Äquivalenzpunktes dosiert. Sehr kleine Werte sollen nur verwendet werden, wenn kleine Titriermittelverbräuche erwartet werden. Sonst könnten unerwünschte Äquivalenzpunkte ausgewertet werden.

Max. Inkrement

0.1 ... 9999.9 μL , [aus] (nur Titrimo)

Ein maximales Volumeninkrement sollte gewählt werden, wenn der Titriermittelverbrauch bis zum Erreichen des Äquivalenzpunktes sehr klein ist, ein Startvolumen bis kurz vor Erreichen des Äquivalenzpunktes dosiert wird oder wenn der Richtungswechsel im Sprungbereich sehr abrupt ist, da sonst im Bereich des Äquivalenzpunktes leicht ein zu grosses Volumen dosiert wird. Der Wert sollte nicht kleiner als 1/100 Zylindervolumen sein.

Dosiergeschwindigkeit

0.01 ... 166.00 mL/min, [maximal] (Titrimo)

0.01 ... 150.00 mL/min, [maximal] (Titrimo)

Geschwindigkeit, mit der die Volumeninkremente zudosiert werden. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Temperatur

Temperatur

-20.0 ... [25.0] ... 150.0 °C (Titrand)

-170.0 ... [25.0] ... 500.0 °C (Titrino)

Titrationstemperatur, die manuell eingegeben werden kann. Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist und die **Temperaturmessung** in der Registerkarte Allgemein / Hardware unter **Sensor** auf **automatisch** oder **kontinuierlich** eingestellt ist, wird die Temperatur laufend gemessen.

Abbruchbedingungen

Befehlsname

25 Zeichen, [DET Upol #]

Name des Befehls.

Bedingungen für den Abbruch der Titration. Sind mehrere Abbruchbedingungen gesetzt, führt dasjenige Kriterium zum Abbruch der Titration, das zuerst erreicht wird.

Stoppvolumen

0.00000 ... [100.000] ... 9999.99 mL, aus (Titrand)

0.000 ... [100.000] ... 9999.99 mL, aus (Titrino)

Abbruch, wenn seit dem Start der Titration (einschliesslich Startbedingungen) das eingegebene Volumen dosiert wurde. Passen Sie das Stoppvolumen dem Probeneinmass oder der Grösse Ihres Titriergefässes an.

Stoppmesswert

-200.0 ... 200.0 µA, [aus]

Abbruch, wenn seit dem Start der Titration der eingegebene Messwert für einen Messpunkt über- bzw. unterschritten wurde.

Stopp EP

1 ... [9], aus

Abbruch, wenn die eingegebene Anzahl Äquivalenzpunkte gefunden wurde.

Volumen nach EP

0.0100 ... 9999.99 mL, [aus] (nur Titrand)

Wenn die unter **Stopp EP** eingegebene Anzahl Äquivalenzpunkte gefunden wurde, wird dieses Volumen dosiert. So sieht man auch den Kurvenverlauf nach Erreichen des Endpunktes.

Stoppzeit

0 ... 999999 s, [aus] (nur Titrand)

Abbruch, wenn nach dem Start der Titration (einschliesslich Startbedingungen) die eingegebene Zeit abgelaufen ist.

Füllgeschwindigkeit

0.01 ... 166.00 mL/min, [maximal] (Titrand)

0.01 ... 150.00 mL/min, [maximal] (Titrino)

Geschwindigkeit, mit der nach der Titration die Bürette gefüllt werden soll. Die maximale Füllgeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Potentiometrische Auswertung

	Untere Grenze μA	Obere Grenze μA	EP-Kriterium	EP-Anerkennung
1	-200,0	0	5	erster
2	0,0	200,0	3	letzter

Befehlsname

25 Zeichen, [DET Upol #]
Name des Befehls.

Parameter für die potentiometrische Auswertung der Titrationskurve mit automatischer Äquivalenzpunkterkennung. Dabei kann eine der drei folgenden Auswertungsmethoden ausgewählt werden:

Auswertung ohne Fenster

Parameter: siehe *DET pH - Potentiometrische Auswertung*

Auswertung mit Messwertfenster (Upol)

ein, [aus]

Mit dieser Option können auf der Messwertachse bis zu 9 Bereiche (Fenster) definiert werden. Endpunkte werden nur anerkannt, wenn sie innerhalb dieser Fenster liegen und zusätzlich die pro Fenster definierten Parameter erfüllen. Pro Fenster wird nur ein Endpunkt anerkannt. Die definierten Fenster mit ihren Parametern werden in der Fenstertabelle angezeigt und können mit den folgenden Schaltflächen editiert werden:

Neu

Öffnen des Dialogfensters **Messwertfenster #** (siehe unten), in dem die Parameter für ein neues Fenster eingegeben werden können.

Eigenschaften

Öffnen des Dialogfensters **Messwertfenster #** (siehe unten), in dem die Parameter für das ausgewählte Fenster bearbeitet werden können.

Löschen

Löschen des in der Tabelle ausgewählten Fensters.

EP-Kriterium

0 ... [5] ... 200 (nur Titrimo)

Kriterium für die Anerkennung von Endpunkten, das für alle Fenster gilt. Endpunkte, deren gefundener ERC-Wert kleiner ist als der hier eingegebene Wert werden nicht anerkannt.

Messwertfenster (Upol)

Messwertfenster sind definierte Teilbereiche (Fenster) auf der Messwertachse, für die unterschiedliche Parameter für die potentiometrische Auswertung definiert werden können. Endpunkte werden nur anerkannt, wenn sie innerhalb dieser Fenster liegen und zusätzlich die pro Fenster definierten Parameter erfüllen. Pro Fenster wird nur ein Endpunkt anerkannt.

Untere Grenze

[-200.0] ... 200.0 µA

Untere Grenze für das Messwertfenster.

Obere Grenze

-200.0 ... [200.0] µA

Obere Grenze für das Messwertfenster.

EP-Kriterium

0 ... [5] ... 200

Kriterium für die Anerkennung von Endpunkten. Endpunkte, deren gefundener ERC-Wert kleiner ist als der hier eingegebene Wert werden nicht anerkannt.

EP-Anerkennung

Filter für die Anerkennung von Endpunkten (nur Titrand):

erster

Nur der erste gefundene Endpunkt wird anerkannt.

grösster

Nur der Endpunkt mit dem grössten ERC, d.h. dem steilsten Sprung wird anerkannt.

letzter

Nur der letzte gefundene Endpunkt wird anerkannt.

steigend

Nur Endpunkte mit positiver Steigung der Titrationskurve werden anerkannt.

fallend

Nur Endpunkte mit negativer Steigung der Titrationskurve werden anerkannt.

Auswertung mit Volumenfenster (mL)

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Potentiometrische Auswertung*

Weitere Auswertungen

Befehlsname

25 Zeichen, [DET Upol #]

Name des Befehls.

Hier können die folgenden zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven eingeschaltet und definiert werden:

Fix-Endpunkt-Auswertung

ein, [aus]

Zu einer fixen Größe (Messwert, Volumen oder Zeit) werden für den Fix-Endpunkt aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Größen interpoliert.

Fixe Messgröße

[Messwert], Zeit, Volumen

Auswahl der fixen Messgröße, zu der aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Größen interpoliert werden.

Fix-EP# bei

-200.0 ... 200.0 µA, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgröße** = **Messwert**.

Fix-EP# bei

0.0 ... 999999.9 s, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgröße** = **Zeit**.

Fix-EP# bei

0.00000 ... 9999.99 mL, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgröße** = **Volumen**.

9 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden zusätzlich zu den immer vorhandenen Fix-EP1...3 auch die Fix-EP4...9 angezeigt.

3 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden anstelle der Fix-EP1...9 nur noch die Fix-EP1...3 angezeigt.

Minimum-Auswertung

ein, [aus]

Zum minimalen Messwert werden aus der Messpunktliste das zugehörige Volumen, die Zeit und die Temperatur interpoliert () (siehe *Titrationsebefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.5 ... [5.0] ... 10.0 μ A/mL

Die Auswertung des Minimums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Maximum-Auswertung

ein, [aus]

Zum maximalen Messwert werden aus der Messpunktliste das zugehörige Volumen, die Zeit und die Temperatur interpoliert () (siehe *Titrationsebefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.5 ... [5.0] ... 10.0 μ A/mL

Die Auswertung des Maximums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Knickpunkt-Auswertung

ein, [aus] (nur Titrande)

Mit der Knickpunkt-Auswertung werden scharfe Richtungsänderungen in der Titrationsebe bestimmt (siehe *Titrationsebefehle - Auswertung - Knickpunkt-Auswertung*).

EP-Kriterium

0 ... [0.3] ... 1.0

Mass für die minimale Schärfe des Knicks. Je kleiner das EP-Kriterium gesetzt wird, desto mehr Knickpunkte werden gefunden. Da es sich um einen relativen Wert bezogen auf die Gesamtmesswertänderung handelt, können bei einem kleinen Messwertbereich schon kleine Messwertänderungen als Knick ausgewertet werden.

Steilheit

0.0 ... [0.9] ... 10.0

Minimale Differenz zwischen der Steilheit vor und nach dem Knickpunkt. Je kleiner die Differenz, desto mehr Knickpunkte werden gefunden.

Glättungsfaktor

2 ... [5] ... 20

Je höher der Glättungsfaktor, desto weniger Endpunkte werden gefunden.

Fenster

Messwert, Volumen, Zeit, [aus]

Auf der Messwertachse, auf der Volumenachse oder auf der Zeitachse kann ein Bereich (Fenster) definiert werden. Die Knickpunkt-Auswertung erfolgt nur im vorgegebenen Fenster. Es wird jeweils nur der erste Knickpunkt anerkannt, der innerhalb des gesetzten Fensters liegt.

Untere Grenze

[-200.0] ... 200.0 μ A (für **Fenster** = **Messwert**)

[0.00000] ... 9999.99 mL (für **Fenster** = **Volumen**)

[0] ... 999999 s (für **Fenster** = **Zeit**)

Wert für die untere Grenze des Fensters.

Obere Grenze

-200.0 ... [200.0] μ A (für **Fenster** = **Messwert**)

0.00000 ... [9999.99] mL (für **Fenster** = **Volumen**)

0 ... [999999] s (für **Fenster** = **Zeit**)

Wert für die obere Grenze des Fensters.

Weitere Messwerte


Abbildung und Parameter: siehe DET pH - Weitere Messwerte

MET

Befehl für **Monotone Äquivalenzpunkt-Titrationsen (MET)**.

Prinzip

Mit diesem Befehl werden Titrationsen mit Reagenzzugabe in konstanten Volumenzinkrementen ausgeführt. Die Messwertübernahme erfolgt driftkontrolliert (Gleichgewichtstitration) oder nach einer Wartezeit. Äquivalenzpunkte werden automatisch ausgewertet.

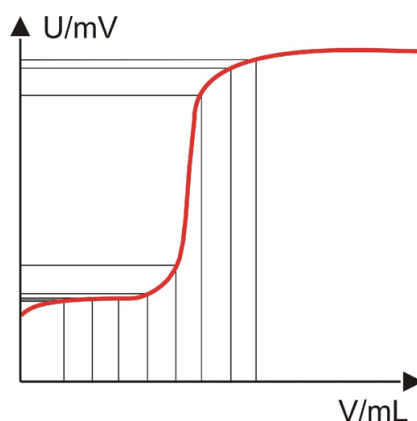

Hinweis

Dieser Befehl eignet sich für Titrationsen mit mit relativ hohen Signalschwankungen oder plötzlich auftretendem Potentialsprung und für langsame Titrationsen oder langsam ansprechende Elektroden.

Befehle

Je nach Messwert können die folgenden vier MET-Befehle ausgewählt werden:

- **MET pH**
Potentiometrische pH-Messung mit pH-Elektroden (Messgröße pH).
- **MET U**
Potentiometrische Spannungsmessung mit Metallelektroden (Messgröße Spannung U).
- **MET Ipol**
Voltametrische Messung mit wählbarem Polarisationsstrom (Messgröße Spannung U).
- **MET Upol**
Amperometrische Messung mit wählbarer Polarisationsspannung (Messgröße Strom I).

MET pH

Befehl für **Monotone Äquivalenzpunkt-Titrationsen** mit potentiometrischer pH-Messung.

Geräte


Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **MET** verfügen:

Titrimo: 702, 716, 721, 736, 751, 785, 794, 798, 799

Titrand: 808, 809, 835, 836

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

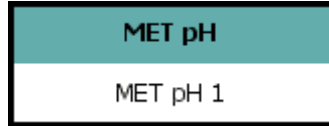

Parameter

Die Parameter für den Befehl **MET pH** werden auf den folgenden 7 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Dosierer, Sensor und Rührer.
- **Startbedingungen**
Parameter für die Messung des Initialmesswertes sowie Definition der Bedingungen, die beim Start der Titration erfüllt sein müssen.
- **Titrationparameter**
Parameter für Ablauf der Titration.
- **Abbruchbedingungen**
Definition der Bedingungen, die den Abbruch der Titration bewirken.
- **Potentiometrische Auswertung**
Parameter für die potentiometrische Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Auswertungen**
Definition von zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten von anderen Messbefehlen, die als zusätzliche Messwertkolonnen gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

Abbildung und Parameter: siehe *DET pH - Allgemein/Hardware*

Startbedingungen

Abbildung und Parameter: siehe *DET pH - Startbedingungen*

Titrationparameter

Befehlsname

25 Zeichen, [MET pH #]

Name des Befehls.

Parameter für den Ablauf der Titration.

Titrationgeschwindigkeit

Titrationgeschwindigkeit

Für die Titrationgeschwindigkeit können die drei vordefinierten Parametersätze **langsam**, **optimal** und **schnell** gewählt werden, bei denen die Parameter für **Messwertübernahme** und **Dosieren der Inkremente** nicht angezeigt werden. Um diese Parameter editieren zu können, muss die Einstellung **Anwender** ausgewählt werden.

langsam

Für Titrationsen, bei denen auch kleinste Details sichtbar sein sollen. Allerdings kann dadurch auch das Rauschen verstärkt werden, was zu unerwünschten EPs führen kann.

[optimal]

Parametersatz für alle Standardtitrationen, für die häufigsten Anwendungen optimiert.

schnell

Für wenig kritische, schnelle Titrationsen.

Anwender

Anwenderdefinierte Einstellung der einzelnen Parameter, welche die Titrationgeschwindigkeit beeinflussen.

Messwertübernahme

(wird nur für **Titrationgeschwindigkeit** = Anwender angezeigt)

Messwertdrift

0.1 ... [20.0 (langsam)] ... [50.0 (optimal)] ... [80.0 (schnell)] ... 999.0

mV/min (Titrande),

0.5 ... [20.0 (langsam)] ... [50.0 (optimal)] ... [80.0 (schnell)] ... 999.0

mV/min (Titrino),

aus

Drift für die Messwertübernahme während der Titration. **aus** bedeutet, die Messwertübernahme erfolgt nach der maximalen Wartezeit.

Min. Wartezeit

[0 (langsam, optimal, schnell)] ... 999999 s (nur Titrande)

Die minimale Wartezeit ist nur für driftkontrollierte Messungen von Bedeutung. Die Messwertübernahme erfolgt erst nach Ablauf der minimalen Wartezeit, auch wenn die Messwertdrift schon erreicht ist. Während des Ablaufs der minimalen Wartezeit wird die Drift weiterhin kontrolliert.

Max. Wartezeit

0 ... [38 (langsam)] ... [26 (optimal)] ... [21 (schnell)] ... 999999 s (Titrande),
0 ... [38 (langsam)] ... [26 (optimal)] ... [21 (schnell)] ... 9999 s (Titrino)

Wenn die Messwertdrift ausgeschaltet oder noch nicht erreicht ist, erfolgt die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit. Falls die Wartezeit nicht neu eingegeben wurde, wird automatisch eine zur Drift passende Wartezeit nach folgender Formel berechnet:

$$\text{Wartezeit} = 150 / \sqrt{\text{Drift} + 0.01} + 5$$

Dosieren der Inkremente

(wird nur für **Titrationsgeschwindigkeit** = **Anwender** angezeigt)

Volumeninkrement

0.0001 ... [0.05 (langsam)] ... [0.10 (optimal)] ... [0.20 (schnell)] ... 9.9999 mL (Titrande),

0.00 ... [0.05 (langsam)] ... [0.10 (optimal)] ... [0.20 (schnell)] ... 9.999 mL (Titrino)

Kleine Volumeninkremente werden benutzt, um Blindwerte zu bestimmen oder bei stark unsymmetrischen Kurven. Ein guter Richtwert ist 1/20 des erwarteten EP-Volumens. Bei steilen Sprüngen sollte das Volumeninkrement eher 1/100 und bei flachen eher 1/10 des EP-Volumens sein.

Dosiergeschwindigkeit

0.01 ... 166.00 mL/min, [maximal] (Titrande)

0.01 ... 150.00 mL/min, [maximal] (Titrino)

Geschwindigkeit, mit der die Volumeninkremente zudosiert werden. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Bürette ab.

Temperatur

Temperatur

-20.0 ... [25.0] ... 150.0 °C (Titrande)

-170.0 ... [25.0] ... 500.0 °C (Titrino)

Titrationstemperatur, die manuell eingegeben werden kann. Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist und die **Temperaturmessung** in der Registerkarte Allgemein / Hardware unter **Sensor** auf **automatisch** oder **kontinuierlich** eingestellt ist, wird die Temperatur laufend gemessen. Der Wert wird für die Temperaturkorrektur bei pH-Messungen benutzt.

Abbruchbedingungen

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Abbruchbedingungen*

Potentiometrische Auswertung

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Potentiometrische Auswertung*

Weitere Auswertungen

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Weitere Auswertungen*

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Weitere Messwerte*

MET U

Befehl für **Monotone Äquivalenzpunkt-Titrationen** mit potentiometrischer Spannungsmessung.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **MET** verfügen:

Titrimo: 702, 716, 721, 736, 751, 785, 794, 798, 799

Titrimo: 808, 809, 835, 836

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **MET U** werden auf den folgenden 7 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Dosierer, Sensor und Rührer.
- **Startbedingungen**
Parameter für die Messung des Initialmesswertes sowie Definition der Bedingungen, die beim Start der Titration erfüllt sein müssen.
- **Titrimationsparameter**
Parameter für Ablauf der Titration.
- **Abbruchbedingungen**
Definition der Bedingungen, die den Abbruch der Titration bewirken.
- **Potentiometrische Auswertung**
Parameter für die potentiometrische Auswertung der Titrimationskurven.
- **Weitere Auswertungen**
Definition von zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrimationskurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten von anderen Messbefehlen, die als zusätzliche Messwertkolonnen gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

Abbildung und Parameter: *siehe DET U - Allgemein/Hardware*

Startbedingungen

Abbildung und Parameter: *siehe DET U - Startbedingungen*

Titrationsparameter

Abbildung und Parameter: siehe *MET pH - Titrationsparameter*

Abbruchbedingungen

Abbildung und Parameter: siehe *DET U - Abbruchbedingungen*

Potentiometrische Auswertung

Abbildung und Parameter: siehe *DET U - Potentiometrische Auswertung*

Weitere Auswertungen

Abbildung und Parameter: siehe *DET U - Weitere Auswertungen*

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: siehe *DET pH - Weitere Messwerte*

MET Ipol

Befehl für **Monotone Äquivalenzpunkt-Titrationen** mit voltametrischer Messung (wählbarer Polarisationsstrom).

Geräte


Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **MET** verfügen:

Titrimo: 702, 716, 721, 736, 751, 785, 794, 798, 799

Titrimo: 808, 809, 835, 836

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

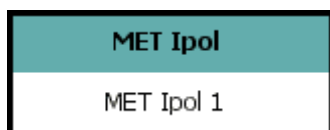

Parameter

Die Parameter für den Befehl **MET Ipol** werden auf den folgenden 7 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Dosierer, Sensor und Rührer.
- **Startbedingungen**
Parameter für die Messung des Initialmesswertes sowie Definition der Bedingungen, die beim Start der Titration erfüllt sein müssen.
- **Titrationsparameter**
Parameter für Ablauf der Titration.

- **Abbruchbedingungen**
Definition der Bedingungen, die den Abbruch der Titration bewirken.
- **Potentiometrische Auswertung**
Parameter für die potentiometrische Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Auswertungen**
Definition von zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten von anderen Messbefehlen, die als zusätzliche Messwertkolonnen gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

Abbildung und Parameter: *siehe DET Ipol - Allgemein/Hardware*

Startbedingungen

Abbildung und Parameter: *siehe DET Ipol - Startbedingungen*

Titrationsparameter

Abbildung und Parameter: *siehe MET pH - Titrationsparameter*

Abbruchbedingungen

Abbildung und Parameter: *siehe DET U - Abbruchbedingungen*

Potentiometrische Auswertung

Abbildung und Parameter: *siehe DET Ipol - Potentiometrische Auswertung*

Weitere Auswertungen

Abbildung und Parameter: *siehe DET Ipol - Weitere Auswertungen*

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Weitere Messwerte*

MET Upol

Befehl für **Monotone Äquivalenzpunkt-Titrationsen** mit amperometrische Messung (wählbare Polarisationsspannung).

Geräte


Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **MET** verfügen:

Titrimo: 702, 716, 721, 736, 751, 785, 794, 798, 799

Titrand: 808, 809, 835, 836

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

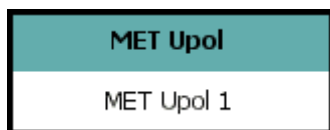

Parameter

Die Parameter für den Befehl **MET Upol** werden auf den folgenden 7 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Dosierer, Sensor und Rührer.
- **Startbedingungen**
Parameter für die Messung des Initialmesswertes sowie Definition der Bedingungen, die beim Start der Titration erfüllt sein müssen.
- **Titrationparameter**
Parameter für Ablauf der Titration.
- **Abbruchbedingungen**
Definition der Bedingungen, die den Abbruch der Titration bewirken.
- **Potentiometrische Auswertung**
Parameter für die potentiometrische Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Auswertungen**
Definition von zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten von anderen Messbefehlen, die als zusätzliche Messwertkolonnen gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

Abbildung und Parameter: *siehe DET Upol - Allgemein/Hardware*

Startbedingungen

Abbildung und Parameter: *siehe DET Upol - Startbedingungen*

Titrationparameter

Abbildung und Parameter: *siehe DET Upol - Titrationsparameter*

Abbruchbedingungen

Abbildung und Parameter: *siehe DET Upol - Abbruchbedingungen*

Potentiometrische Auswertung

Abbildung und Parameter: *siehe DET Upol - Potentiometrische Auswertung*

Weitere Auswertungen

Abbildung und Parameter: *siehe DET Upol - Weitere Auswertungen*

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Weitere Messwerte*

SET


Befehl für **Set Endpunkt-Titrationen (SET)**.

Prinzip

Mit diesem Befehl werden Titrationen auf einen oder zwei vorgegebene Endpunkte ausgeführt. Der Abbruch der Titration am Endpunkt erfolgt driftkontrolliert oder nach einer Wartezeit. Das Volumen, das bis zum Endpunkt dosiert wurde, ergibt den verrechenbaren Reagenzverbrauch.

Während der Titration erfolgt die Reagenzdosierung in drei Phasen:

- **Anfangsdosierung**
Während dieser Phase wird die Dosiergeschwindigkeit kontinuierlich gesteigert. Sie beginnt mit der **Minimalen Geschwindigkeit** und steigt bis zur **Maximalen Geschwindigkeit**.
- **Kontinuierliche Dosierung**
Es wird so lange mit der **Maximalen Geschwindigkeit** dosiert bis der **Regelbereich** erreicht ist.
- **Regelbereich**
In diesem Bereich wird die Dosierung fein geregelt. Kurz vor Erreichen des Endpunktes wird nur noch mit der **Minimalen Geschwindigkeit** dosiert (siehe "Regelbereich").

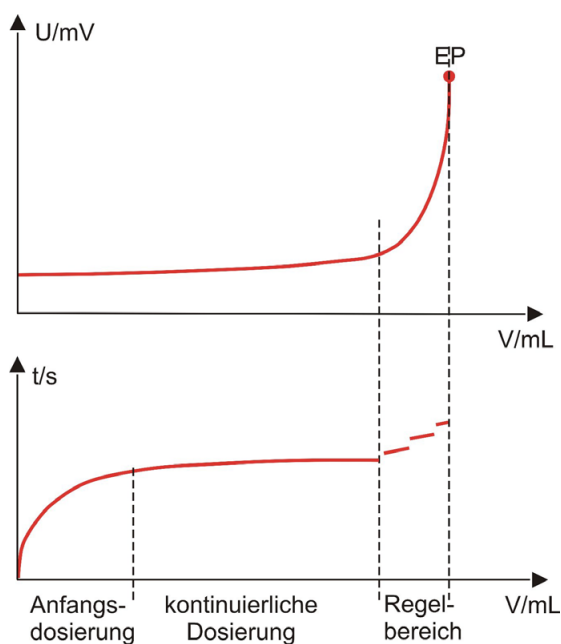

Hinweis

Dieser Befehl eignet sich für schnelle Routinebestimmungen, wenn sich der Endpunkt im Laufe einer Serie nicht ändert und für Titrationen, bei denen ein Reagenzüberschuss vermieden werden muss.

Befehle

Je nach Messwert können die folgenden vier **SET**-Befehle ausgewählt werden:

- **SET pH**
Potentiometrische pH-Messung mit pH-Elektroden (Messgrösse pH).
- **SET U**
Potentiometrische Spannungsmessung mit Metallelektroden (Messgrösse Spannung U).

- **SET Upol**
Amperometrische Messung mit wählbarer Polarisationsspannung (Messgrösse Strom I).
- **SET Ipol**
Voltametrische Messung mit wählbarem Polarisationsstrom (Messgrösse Spannung U).

SET pH

Befehl für **Set Endpunkt-Titrationen** mit potentiometrischer pH-Messung.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **SET** verfügen:


Titrimo: 702, 716, 718, 719, 720, 721, 736, 751, 758, 785, 794, 798, 799

Titrimo: 808, 809, 835, 836, 841


Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

ohne Konditionieren

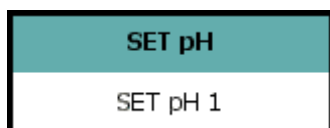

mit Konditionieren

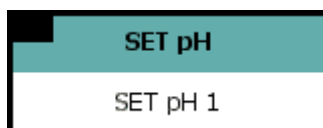

Parameter

Die Parameter für den Befehl **SET pH** werden auf den folgenden 8 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Dosierer, Sensor und Rührer.
- **Startbedingungen**
Parameter für die Messung des Initialmesswertes sowie Definition der Bedingungen, die beim Start der Titration erfüllt sein müssen.
- **Regelparameter**
Regelparameter für Endpunkt 1 und Endpunkt 2 (Messwerte für die Endpunkte, Titrationsgeschwindigkeit, Anwenderdefinierte Parameter, Stoppkriterium).
- **Titrationparameter**
Parameter für Ablauf der Titration.
- **Abbruchbedingungen**
Definition der Bedingungen, die den Abbruch der Titration bewirken.
- **Konditionieren**
Ein-/Ausschalten des Konditionierens. Definition von Startdrift, Driftkorrektur und Stoppbedingungen.
- **Weitere Auswertungen**
Definition von zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten von anderen Messbefehlen, die als zusätzliche Messwertkolonnen gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

Abbildung und Parameter: siehe DET pH - Allgemein/Hardware

Startbedingungen

Befehlsname
25 Zeichen, [SET pH #]
Name des Befehls.

Die Startbedingungen werden in der aufgeführten Reihenfolge abgearbeitet, bevor die Titration gestartet wird.

Initialmesswert

Vor dem Abarbeiten der übrigen Startbedingungen wird der Initialmesswert bestimmt. Die Messwertübernahme ist von den drei folgenden Parametern abhängig:

Messwertdrift

0.1 ... 999.0 mV/min, [aus] (nur Titrando)

Der Messwert wird erst übernommen, wenn die Messwertdrift den hier eingegebenen Wert unterschreitet. **aus** bedeutet, dass die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit erfolgt.

Min. Wartezeit

[0] ... 999999 s (nur Titrando)

Die minimale Wartezeit ist nur für driftkontrollierte Messungen von Bedeutung. Die Messwertübernahme erfolgt erst nach Ablauf der minimalen Wartezeit, auch wenn die Messwertdrift schon erreicht ist. Während des Ablaufs der minimalen Wartezeit wird die Drift weiterhin kontrolliert.

Max. Wartezeit

0 ... [1] ... 999999 s (nur Titrando)

Wenn die Messwertdrift ausgeschaltet oder noch nicht erreicht ist, erfolgt die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit.

Pause 1

Pause 1

[0] ... 999999 s (nur Titrando und Titrino 719, 720, 736, 751, 758, 785, 794, 798, 799)

Wartezeit, z.B. zum Einschwingen der Elektrode, bevor ein Startvolumen dosiert wird.

Startvolumen

Startvolumen

[0.00000] ... 9999.99 mL (Titrando),

[0.00] ... 999.99 mL (Titrino)

Volumen, das vor dem Start der Titration mit der angegebenen Dosiergeschwindigkeit zudosiert werden soll.

Dosiergeschwindigkeit

0.01 ... 166.00 mL/min, [maximal] (Titrando),

0.01 ... 150.00 mL/min, [maximal] (Titrino)

Geschwindigkeit, mit der das Startvolumen dosiert werden soll. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Pause 2

Pause 2

[0] ... 999999 s

Wartezeit, z.B. zum Einschwingen der Elektrode nach dem Start oder Reaktionszeit nach dem Dosieren eines Startvolumens. Die Pause läuft am Ende aller Startbedingungen ab.

Regelparameter

Befehlsname

25 Zeichen, [SET pH #]

Name des Befehls.

Die Regelparameter können für jeden Endpunkt separat eingestellt werden.

Endpunkt 1

EP1 bei pH

-20.000 ... 20.000, [aus] (Titrande),

-20.00 ... 20.00, [aus] (Titrino)

Messwert für den ersten Endpunkt.

Titrationengeschwindigkeit

Titrationengeschwindigkeit

Für die Titrationengeschwindigkeit können die drei vordefinierten Parametersätze **langsam**, **optimal** und **schnell** gewählt werden, bei denen die Parameter für **Regelung** nicht angezeigt werden. Um diese Parameter editieren zu können, muss die Einstellung **Anwender** ausgewählt werden.

langsam

Für Titrationsen, bei denen auch kleinste Details sichtbar sein sollen. Allerdings kann dadurch auch das Rauschen verstärkt werden, was zu unerwünschten EPs führen kann.

[optimal]

Parametersatz für alle Standardtitrationen, für die häufigsten Anwendungen optimiert.

schnell

Für wenig kritische, schnelle Titrationsen.

Anwender

Anwenderdefinierte Einstellung der einzelnen Parameter, welche die Titrationengeschwindigkeit beeinflussen.

Regelung

(wird nur für **Titrationengeschwindigkeit** = **Anwender** angezeigt)

Regelbereich pH

0.001 ... [2.000 (langsam)] ... [2.000 (optimal)] ... [0.500 (schnell)] ...

20.000, aus (Titrande),

0.01 ... [2.00 (langsam)] ... [2.00 (optimal)] ... [0.50 (schnell)] ... 20.00, aus (Titrino)

Der Regelbereich definiert den Messwertbereich vor dem gegebenen Endpunkt. Er hat einen entscheidenden Einfluss auf die Titrationsgeschwindigkeit und damit auf die Genauigkeit. Im Regelbereich wird die Dosierung durch die **Minimale Geschwindigkeit** kontrolliert. Je näher der Endpunkt, desto langsamer wird dosiert, bis die **Minimale Geschwindigkeit** erreicht ist. Je grösser der Regelbereich, desto langsamer ist die Titration. Ausserhalb des Regelbereichs wird kontinuierlich mit **Maximaler Geschwindigkeit** dosiert (siehe Regelbereich).

Max. Geschwindigkeit

0.01 ... [1.00 (langsam)] ... [10.00 (optimal)] ... 166.00 mL/min, [maximal (schnell)] (Titrande)

0.01 ... [1.00 (langsam)] ... [10.00 (optimal)] ... 150.00 mL/min, [maximal (schnell)] (Titrino)

Geschwindigkeit, mit der ausserhalb des **Regelbereichs** dosiert wird. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Min. Geschwindigkeit

0.01 ... [5.00 (langsam)] ... [25.00 (optimal)] ... [50.00 (schnell)] ... 9999.00 µL/min

Geschwindigkeit, mit der ganz am Anfang der Titration und im **Regelbereich** am Ende der Titration dosiert wird. Je kleiner die minimale Geschwindigkeit gewählt wird, desto langsamer ist die Titration.

Stoppkriterium

Stoppkriterium

[**Drift**], **Zeit**, **aus**

Wenn der Endpunkt erreicht ist und das Stoppkriterium erfüllt ist, wird die Titration nach der letzten Dosierung abgebrochen. Die Titration kann beim Erreichen einer bestimmten **Drift** oder nach einer bestimmten **Zeit** abgebrochen werden. Wenn das Stoppkriterium **aus** gewählt wurde, wird die Titration nicht abgebrochen.

Hinweis

Die Abbruchbedingungen führen immer zum Abbruch, auch wenn das Stoppkriterium nicht erreicht wurde oder ausgeschaltet ist.

Stoppdrift

1 ... [20] ... 999 µL/min

Wenn der Endpunkt und die Stoppdrift erreicht sind, wird die Titration abgebrochen. Dieser Parameter wird nur für **Stoppkriterium** = **Drift** angezeigt.

Abschaltzeit

0 ... [10] ... 999 s (Titrando),

0 ... [10] ... 999 s, **inf.** (Titrino)

Wenn der Endpunkt erreicht ist, wird nach der letzten Dosierung die hier definierte Abschaltzeit abgewartet und dann die Titration abgebrochen. Dieser Parameter wird nur für **Stoppkriterium** = **Zeit** angezeigt. Die Auswahl **inf.** steht für infinite (unendlich).

Stoppzeit

0 ... 999999 s (nur Titrino)

Die Titration wird abgebrochen, wenn seit dem Start der Titration die hier definierte Stoppzeit abgelaufen ist. Dieser Parameter wird nur für **Stoppkriterium** = **Zeit** und **Relative Stoppzeit** = **inf.** angezeigt.

Endpunkt 2

(wird nur für **EP1 bei pH** ≠ **aus** angezeigt)

ein, [**aus**]

Ein-/Ausschalten des Endpunktes 2. Ist diese Option ausgeschaltet, werden die zugehörigen Parameter nicht angezeigt.

EP2 bei pH

-20.000 ... 20.000, [**aus**] (Titrando),

-20.00 ... 20.00, [**aus**] (Titrino)

Messwert für den zweiten Endpunkt.

Parameter für **Endpunkt 2** siehe oben.

Titrationparameter

SET pH - SET pH 12

Befehlsname: SET pH 12

Abbruchbedingungen	Konditionieren	Weitere Auswertungen	Weitere Messwerte
Allgemein/Hardware	Startbedingungen	Regelparameter	Titrationparameter

Titrationsrichtung: auto

Extraktionszeit: 0 s

Temperatur: 25.0 °C

Zeitintervall Messpunkt: 2.0 s

OK Abbrechen

Befehlsname

25 Zeichen, [SET pH #]

Name des Befehls.

Parameter für den Ablauf der Titration.

Tittrationsrichtung

Auswahl der Tittrationsrichtung. Wenn zwei Endpunkte gesetzt sind, ist die Tittrationsrichtung bereits festgelegt und die folgende Auswahl der **Tittrationsrichtung** wird ignoriert.

+

positive Messwertänderung

-

negative Messwertänderung

[auto]

Die Tittrationsrichtung wird automatisch aus dem Anfangsmesswert und dem gesetzten Endpunkt bestimmt.

Extraktionszeit

0 ... 999999 s (nur Tittrando und Tittrino 719, 720, 736, 751, 758, 785, 794, 798, 799)

Die Tittration wird nicht abgebrochen, bis die Extraktionszeit abgelaufen ist (auch wenn der EP schon erreicht ist). Die Eingabe einer Extraktionszeit ist z.B. bei der Tittration schwerlöslicher Proben sinnvoll.

Temperatur

-20.0 ... [25.0] ... 150.0 °C (Tittrando)

-170.0 ... [25.0] ... 500.0 °C (Tittrino)

Tittrationstemperatur, die manuell eingegeben werden kann. Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist und die **Temperaturmessung** in der Registerkarte **Allgemein/Hardware** unter **Sensor** auf **automatisch** oder **kontinuierlich** eingestellt ist, wird die Temperatur laufend gemessen. Der Wert wird für die Temperaturkorrektur bei pH-Messungen benützt.

Zeitintervall Messpunkt

0.1 ... [2.0] ... 999999 s (Tittrando)

0.08 ... [2.00] ... 16200 s (Tittrino)

Zeitintervall für den Eintrag eines Messpunktes in die Messpunktliste.

Abbruchbedingungen

Befehlsname

25 Zeichen, [SET pH #]

Name des Befehls.

Bedingungen für den Abbruch der Tittration. Sind mehrere Abbruchbedingungen gesetzt, führt dasjenige Kriterium zum Abbruch der Tittration, das zuerst erreicht wird.

Stoppvolumen

0.00000 ... [100.000] ... 9999.99 mL, aus (Tittrando)

0.00 ... [100.00] ... 9999.99 mL, aus (Tittrino)

Abbruch, wenn seit dem Start der Titration (einschliesslich Startbedingungen) das eingegebene Volumen dosiert wurde. Passen Sie das Stoppvolumen dem Probeneinmass oder der Grösse Ihres Titriergefässes an.

Stoppzeit

0 ... 999999 s, [aus] (nur Titrande)

Abbruch, wenn nach dem Start der Titration (einschliesslich Startbedingungen) die eingegebene Zeit abgelaufen ist.

Füllgeschwindigkeit

0.01 ... 166.00 mL/min, [maximal] (Titrande)

0.01 ... 150.00 mL/min, [maximal] (Titrino)

Geschwindigkeit, mit der nach der Titration die Bürette gefüllt werden soll. Die maximale Füllgeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Konditionieren

Befehlsname

25 Zeichen, [SET pH #]

Name des Befehls.

Konditionieren

ein, [aus]

Ein-/Ausschalten des Konditionierens. Ist das Konditionieren ausgeschaltet, werden alle nachfolgenden Parameter nicht angezeigt.

Startdrift

1 ... [20] ... 999 µL/min (nur Titrande)

Die Bestimmung kann erst gestartet werden, wenn die aktuell gemessene Drift kleiner ist als die hier eingegebene **Startdrift**. In diesem Fall wechselt der im Ablauffenster angezeigte Status auf **COND READY**.

Driftkorrektur

automatisch, manuell, [aus]

Ist dieser Parameter auf **automatisch** oder **manuell** eingestellt, wird der durch den Leerverbrauch während der Titration verursachte Driftabzug = **Driftwert** x Titrationszeit vom Titriermittelverbrauch subtrahiert. Für **automatisch** gilt der Driftwert beim Start der Titration, für manuell der unter **Driftwert** definierte Wert.

Driftwert

[0] ... 99.9 µL/min

Driftwert für die Driftkorrektur. Dieser Parameter wird nur für **Driftkorrektur** = **manuell** angezeigt.

Stoppvolumen

0.000000 ... [20.00] ... 9999.99 mL, [aus] (nur Titrande)

Abbruch der Bestimmung, wenn seit dem Start des Konditionierens das eingegebene Volumen dosiert wurde. Das Stoppvolumen sollte an die Grösse der Titrierzelle angepasst werden, um ein Überlaufen zu verhindern.

Stopzeit

0 ... 999999 s, [aus] (nur Titrande)

Abbruch der Bestimmung, wenn seit dem Start des Konditionierens die eingegebene Zeit abgelaufen ist.

Wartezeit nach 'Cond ok'

[0] ... 999 s

Wartezeit bis zum Start der Titration, während der die Konditionierbedingung dauernd erfüllt sein muss.

Titration erst nach Startbefehl von SEND-Befehl starten

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird die Titration erst gestartet, wenn mit einem **SEND**-Befehl die **Ereignismeldung Start Titration** an den Befehl geschickt wird.

Hinweis

Beim Eintreffen des **SEND-Befehls** muss das Konditionieren bereits abgeschlossen sein (= **Condok**), ansonsten wird die Anweisung zum Starten der Titration verworfen.

Messwert beim Konditionieren anzeigen

ein, [aus]

Wird diese Option eingeschaltet, so wird zusätzlich zur Drift und Zeit auch der Messwert in der Liveanzeige angezeigt.

Weitere Auswertungen

Befehlsname

25 Zeichen, [SET pH #]

Name des Befehls.

Hier können die folgenden zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven eingeschaltet und definiert werden:

Fix-Endpunkt-Auswertung

ein, [aus]

Zu einer fixen Grösse (Messwert, Volumen oder Zeit) werden für den Fix-Endpunkt aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert.

Fixe Messgrösse

[Messwert], Zeit, Volumen

Auswahl der fixen Messgrösse, zu der aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert werden.

Fix-EP# bei pH

-20.000 ... 20.000, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgrösse** = **Messwert**.

Fix-EP# bei

0.0 ... 999999.9 s, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgrösse** = **Zeit**.

Fix-EP# bei

0.00000 ... 9999.99 mL, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgrösse** = **Volumen**.

9 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden zusätzlich zu den immer vorhandenen Fix-EP1...3 auch die Fix-EP4...9 angezeigt.

3 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden anstelle der Fix-EP1...9 nur noch die Fix-EP1...3 angezeigt.

Minimum-Auswertung

ein, [aus]

Zum minimalen Messwert werden aus der Messpunktliste das zugehörige Volumen, die Zeit und die Temperatur interpoliert () (siehe *Titrationenbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.1 ... [1.0] ... 20.0 pH/mL

Die Auswertung des Minimums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Maximum-Auswertung

ein, [aus]

Zum maximalen Messwert werden aus der Messpunktliste das zugehörige Volumen, die Zeit und die Temperatur interpoliert () (siehe *Titrationenbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.1 ... [1.0] ... 20.0 pH/mL

Die Auswertung des Maximums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: siehe *DET pH - Weitere Messwerte*

SET U

Befehl für **Set Endpunkt-Titrationsen** mit potentiometrischer Spannungsmessung.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **SET** verfügen:


Titrimo: 702, 716, 718, 719, 720, 721, 736, 751, 758, 785, 794, 798, 799

Titrando: 808, 809, 835, 836, 841


Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

ohne Konditionieren

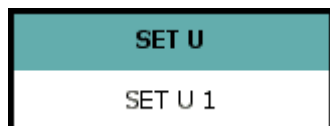

mit Konditionieren

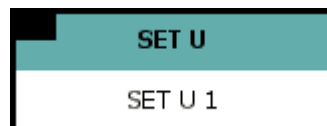

Parameter

Die Parameter für den Befehl **SET U** werden auf den folgenden 8 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Dosierer, Sensor und Rührer.
- **Startbedingungen**
Parameter für die Messung des Initialmesswertes sowie Definition der Bedingungen, die beim Start der Titration erfüllt sein müssen.
- **Regelparameter**
Regelparameter für Endpunkt 1 und Endpunkt 2 (Messwerte für die Endpunkte, Titrationsgeschwindigkeit, Anwenderdefinierte Parameter, Stoppkriterium).
- **Titrationsparameter**
Parameter für Ablauf der Titration.
- **Abbruchbedingungen**
Definition der Bedingungen, die den Abbruch der Titration bewirken.
- **Konditionieren**
Ein-/Ausschalten des Konditionierens. Definition von Startdrift, Driftkorrektur und Stoppbedingungen.
- **Weitere Auswertungen**
Definition von zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten von anderen Messbefehlen, die als zusätzliche Messwertkolonnen gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

Abbildung und Parameter: *siehe DET U - Allgemein/Hardware*

Startbedingungen

Abbildung und Parameter: *siehe SET pH - Startbedingungen*

Regelparameter

Befehlsname
25 Zeichen, [SET U #]
Name des Befehls.

Die Regelparameter können für jeden Endpunkt separat eingestellt werden.

Endpunkt 1

EP1 bei
-2000.0 ... 2000.0 mV, [aus] (Titrando),
-2000 ... 2000, [aus] (Titrino)
Messwert für den ersten Endpunkt.

Titrationsgeschwindigkeit

Titrationsgeschwindigkeit

Für die Titrationsgeschwindigkeit können die drei vordefinierten Parametersätze **langsam**, **optimal** und **schnell** gewählt werden, bei denen die Parameter für **Regelung** nicht angezeigt werden. Um diese Parameter editieren zu können, muss die Einstellung **Anwender** ausgewählt werden.

langsam

Für Titrationen, bei denen auch kleinste Details sichtbar sein sollen. Allerdings kann dadurch auch das Rauschen verstärkt werden, was zu unerwünschten EPs führen kann.

[optimal]

Parametersatz für alle Standardtitrationen, für die häufigsten Anwendungen optimiert.

schnell

Für wenig kritische, schnelle Titrationen.

Anwender

Anwenderdefinierte Einstellung der einzelnen Parameter, welche die Titrationsgeschwindigkeit beeinflussen.

Regelung

(wird nur für **Titrationsgeschwindigkeit** = **Anwender** angezeigt)

Regelbereich

0.1 ... [300.0 (langsam)] ... [100.0 (optimal)] ... [30.0 (schnell)] ... 2000.0 mV, aus (Titrande),

1.00 ... [300.0 (langsam)] ... [100.0 (optimal)] ... [30.00 (schnell)] ... 2000 mV, aus (Titrino)

Der Regelbereich definiert den Messwertbereich vor dem gegebenen Endpunkt. Er hat einen entscheidenden Einfluss auf die Titrationsgeschwindigkeit und damit auf die Genauigkeit. Im Regelbereich wird die Dosierung durch die **Minimale Geschwindigkeit** kontrolliert. Je näher der Endpunkt, desto langsamer wird dosiert, bis die **Minimale Geschwindigkeit** erreicht ist. Je grösser der Regelbereich, desto langsamer ist die Titration. Ausserhalb des Regelbereichs wird kontinuierlich mit **Maximaler Geschwindigkeit** dosiert (siehe Regelbereich).

Max. Geschwindigkeit

0.01 ... [1.00 (langsam)] ... [10.00 (optimal)] ... 166.00 mL/min, [maximal (schnell)] (Titrande)

0.01 ... [1.00 (langsam)] ... [10.00 (optimal)] ... 150.00 mL/min, [maximal (schnell)] (Titrino)

Geschwindigkeit, mit der ausserhalb des **Regelbereichs** dosiert wird. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Burette ab.

Min. Geschwindigkeit

0.01 ... [5.00 (langsam)] ... [25.00 (optimal)] ... [50.00 (schnell)] ... 9999.00 µL/min

Geschwindigkeit, mit der ganz am Anfang der Titration und im **Regelbereich** am Ende der Titration dosiert wird. Je kleiner die minimale Geschwindigkeit gewählt wird, desto langsamer ist die Titration.

Stoppkriterium

Stoppkriterium

[Drift], Zeit, aus

Wenn der Endpunkt erreicht ist und das Stoppkriterium erfüllt ist, wird die Titration nach der letzten Dosierung abgebrochen. Die Titration kann beim Erreichen einer bestimmten **Drift** oder nach einer bestimmten **Zeit** abgebrochen werden. Wenn das Stoppkriterium **aus** gewählt wurde, wird die Titration nicht abgebrochen.

Hinweis

Die Abbruchbedingungen führen immer zum Abbruch, auch wenn das Stoppkriterium nicht erreicht wurde oder ausgeschaltet ist.

Stoppdrift

1 ... [20] ... 999 µL/min

Wenn der Endpunkt und die Stoppdrift erreicht sind, wird die Titration abgebrochen. Dieser Parameter wird nur für **Stoppkriterium** = **Drift** angezeigt.

Abschaltzeit

0 ... [10] ... 999 s (Titrande),

0 ... [10] ... 999 s, inf. (Titrino)

Wenn der Endpunkt erreicht ist, wird nach der letzten Dosierung die hier definierte Abschaltzeit abgewartet und dann die Titration abgebrochen. Dieser Parameter wird nur für **Stoppkriterium** = **Zeit** angezeigt. Die Auswahl **inf.** steht für infinite (unendlich).

Stopptime

0 ... 999999 s (nur Titrimo)

Die Titration wird abgebrochen, wenn seit dem Start der Titration die hier definierte Stopptime abgelaufen ist. Dieser Parameter wird nur für **Stoppkriterium = Zeit** und **Relative Stopptime = inf.** angezeigt.

Endpunkt 2

(wird nur für **EP1 bei** $\neq$ **aus** angezeigt)

ein, [aus]

Ein-/Ausschalten des Endpunktes 2. Ist diese Option ausgeschaltet, werden die zugehörigen Parameter nicht angezeigt.

EP2 bei

-2000.0 ... 2000.0 mV, [aus] (Titrimo),

-2000 ... 2000, [aus] (Titrimo)

Messwert für den zweiten Endpunkt.

Parameter für **Endpunkt 2** siehe oben.

Titrimationsparameter

Abbildung und Parameter: *siehe SET pH - Titrimationsparameter*

Abbruchbedingungen

Abbildung und Parameter: *siehe SET pH - Abbruchbedingungen*

Konditionieren

Abbildung und Parameter: *siehe SET pH - Konditionieren*

Weitere Auswertungen

Befehlsname

25 Zeichen, [SET U #]

Name des Befehls.

Hier können die folgenden zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrimationskurven eingeschaltet und definiert werden:

Fix-Endpunkt-Auswertung

ein, [aus]

Zu einer fixen Grösse (Messwert, Volumen oder Zeit) werden für den Fix-Endpunkt aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert.

Fixe Messgrösse

[Messwert], Zeit, Volumen

Auswahl der fixen Messgrösse, zu der aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert werden.

Fix-EP# bei

-2000.0 ... 2000.0 mV, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgrösse** = **Messwert**.

Fix-EP# bei

0.0 ... 999999.9 s, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgrösse** = **Zeit**.

Fix-EP# bei

0.00000 ... 9999.99 mL, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgrösse** = **Volumen**.

9 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden zusätzlich zu den immer vorhandenen Fix-EP1...3 auch die Fix-EP4...9 angezeigt.

3 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden anstelle der Fix-EP1...9 nur noch die Fix-EP1...3 angezeigt.

Minimum-Auswertung

ein, [aus]

Zum minimalen Messwert werden aus der Messpunktliste das zugehörige Volumen, die Zeit und die Temperatur interpoliert () (siehe *Titrationenbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

1.0 ... [25.0] ... 2000.0 mV/mL

Die Auswertung des Minimums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Maximum-Auswertung

ein, [aus]

Zum maximalen Messwert werden aus der Messpunktliste das zugehörige Volumen, die Zeit und die Temperatur interpoliert () (siehe *Titrationenbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

1.0 ... [25.0] ... 2000.0 mV/mL

Die Auswertung des Maximums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: siehe *DET pH - Weitere Messwerte*

SET Ipol

Befehl für **Set Endpunkt-Titrationen** mit voltametrischer Messung (wählbarer Polarisationsstrom).

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **SET** verfügen:


Titrimo: 702, 716, 718, 719, 720, 721, 736, 751, 758, 785, 794, 798, 799

Titrando: 808, 809, 835, 836, 841

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

ohne Konditionieren

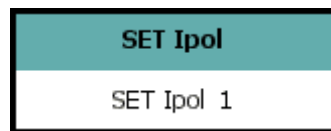

mit Konditionieren



Parameter

Die Parameter für den Befehl **SET Ipol** werden auf den folgenden 8 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Dosierer, Sensor und Rührer.
- **Startbedingungen**
Parameter für die Messung des Initialmesswertes sowie Definition der Bedingungen, die beim Start der Titration erfüllt sein müssen.
- **Regelparameter**
Regelparameter für Endpunkt 1 und Endpunkt 2 (Messwerte für die Endpunkte, Titrationsgeschwindigkeit, Anwenderdefinierte Parameter, Stoppkriterium).
- **Titrationsparameter**
Parameter für Ablauf der Titration.
- **Abbruchbedingungen**
Definition der Bedingungen, die den Abbruch der Titration bewirken.
- **Konditionieren**
Ein-/Ausschalten des Konditionierens. Definition von Startdrift, Driftkorrektur und Stoppbedingungen.
- **Weitere Auswertungen**
Definition von zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten von anderen Messbefehlen, die als zusätzliche Messwertkolonnen gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

Abbildung und Parameter: *siehe DET Ipol - Allgemein/Hardware*

Startbedingungen

Abbildung und Parameter: *siehe SET pH - Startbedingungen*

Regelparameter

Abbildung und Parameter: *siehe SET U - Regelparameter*

Titrationparameter

Abbildung und Parameter: *siehe SET pH - Titrationsparameter*

Abbruchbedingungen

Abbildung und Parameter: *siehe SET pH - Abbruchbedingungen*

Konditionieren

Abbildung und Parameter: *siehe SET pH - Konditionieren*

Weitere Auswertungen

Abbildung und Parameter: *siehe SET U - Weitere Auswertungen*

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Weitere Messwerte*

SET Upol

Befehl für **Set Endpunkt-Titrationen** mit amperometrischer Messung (wählbare polarisationsspannung).

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **SET** verfügen:

Titrimo: 702, 716, 718, 719, 720, 721, 736, 751, 758, 785, 794, 798, 799



Titrando: 808, 809, 835, 836, 841

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

ohne Konditionieren

mit Konditionieren

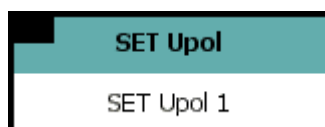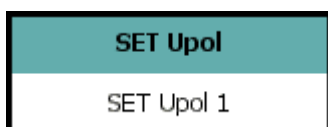

Parameter

Die Parameter für den Befehl **SET Upol** werden auf den folgenden 8 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Dosierer, Sensor und Rührer.
- **Startbedingungen**
Parameter für die Messung des Initialmesswertes sowie Definition der Bedingungen, die beim Start der Titration erfüllt sein müssen.
- **Regelparameter**
Regelparameter für Endpunkt 1 und Endpunkt 2 (Messwerte für die Endpunkte, Titrationsgeschwindigkeit, Anwenderdefinierte Parameter, Stoppkriterium).
- **Titrationparameter**
Parameter für Ablauf der Titration.
- **Abbruchbedingungen**
Definition der Bedingungen, die den Abbruch der Titration bewirken.
- **Konditionieren**
Ein-/Ausschalten des Konditionierens. Definition von Startdrift, Driftkorrektur und Stoppbedingungen.
- **Weitere Auswertungen**
Definition von zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten von anderen Messbefehlen, die als zusätzliche Messwertkolonnen gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

Abbildung und Parameter: siehe *DET Upol - Allgemein/Hardware*

Startbedingungen

SET Upol - SET Upol 16

Befehlsname: SET Upol 16

Abbruchbedingungen | Konditionieren | Weitere Auswertungen | Weitere Messwerte
Allgemein/Hardware | **Startbedingungen** | Regelparameter | Titrationsparameter

Initialmesswert

Messwertdrift: µA/min

Min. Wartezeit: s

Max. Wartezeit: s

Pause 1

Pause 1: s

Startvolumen

Startvolumen: mL

Dosiergeschwindigkeit: mL/min

Pause 2

Pause 2: s

OK Abbrechen

Befehlsname

25 Zeichen, [SET Upol #]

Name des Befehls.

Die Startbedingungen werden in der aufgeführten Reihenfolge abgearbeitet, bevor die Titration gestartet wird.

Initialmesswert

Vor dem Abarbeiten der übrigen Startbedingungen wird der Initialmesswert bestimmt. Die Messwertübernahme ist von den drei folgenden Parametern abhängig:

Messwertdrift

0.1 ... 99.90 $\mu\text{A}/\text{min}$, [aus] (nur Titrand)

Der Messwert wird erst übernommen, wenn die Messwertdrift den hier eingegebenen Wert unterschreitet. **aus** bedeutet, dass die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit erfolgt.

Min. Wartezeit

[0] ... 999999 s (nur Titrand)

Die minimale Wartezeit ist nur für driftkontrollierte Messungen von Bedeutung. Die Messwertübernahme erfolgt erst nach Ablauf der minimalen Wartezeit, auch wenn die Messwertdrift schon erreicht ist. Während des Ablaufs der minimalen Wartezeit wird die Drift weiterhin kontrolliert.

Max. Wartezeit

0 ... [1] ... 999999 s (nur Titrand)

Wenn die Messwertdrift ausgeschaltet oder noch nicht erreicht ist, erfolgt die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit.

Pause 1

Pause 1

[0] ... 999999 s (nur Titrand und Titrino 719, 720, 736, 751, 758, 785, 794, 798, 799)

Wartezeit, z.B. zum Einschwingen der Elektrode, bevor ein Startvolumen dosiert wird.

Startvolumen

Startvolumen

[0.00000] ... 9999.99 mL (Titrand),

[0.00] ... 999.99 mL (Titrino)

Volumen, das vor dem Start der Titration mit der angegebenen Dosiergeschwindigkeit zudosiert werden soll.

Dosiergeschwindigkeit

0.01 ... 166.00 mL/min, [maximal] (Titrand),

0.01 ... 150.00 mL/min, [maximal] (Titrino)

Geschwindigkeit, mit der das Startvolumen dosiert werden soll. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Pause 2

Pause 2

[0] ... 999999 s

Wartezeit, z.B. zum Einschwingen der Elektrode nach dem Start oder Reaktionszeit nach dem Dosieren eines Startvolumens. Die Pause läuft am Ende aller Startbedingungen ab.

Regelparameter

Befehlsname

25 Zeichen, [SET Upol #]
Name des Befehls.

Die Regelparameter können für jeden Endpunkt separat eingestellt werden.

Endpunkt 1

EP1 bei

-200.0 ... 200.0 µA, [aus]
Messwert für den ersten Endpunkt.

Titrationsgeschwindigkeit

Titrationsgeschwindigkeit

Für die Titrationsgeschwindigkeit können die drei vordefinierten Parametersätze **langsam**, **optimal** und **schnell** gewählt werden, bei denen die Parameter für **Regelung** nicht angezeigt werden. Um diese Parameter editieren zu können, muss die Einstellung **Anwender** ausgewählt werden.

langsam

Für Titrationen, bei denen auch kleinste Details sichtbar sein sollen. Allerdings kann dadurch auch das Rauschen verstärkt werden, was zu unerwünschten EPs führen kann.

[optimal]

Parametersatz für alle Standardtitrationen, für die häufigsten Anwendungen optimiert.

schnell

Für wenig kritische, schnelle Titrationen.

Anwender

Anwenderdefinierte Einstellung der einzelnen Parameter, welche die Titrationsgeschwindigkeit beeinflussen.

Regelung

(wird nur für **Titrationsgeschwindigkeit** = **Anwender** angezeigt)

Regelbereich

0.01 ... [40.00 (langsam)] ... [10.00 (optimal)] ... [5.00 (schnell)] ... 200.00 μA , aus (Titrande),

0.1 ... [40.0 (langsam)] ... [10.0 (optimal)] ... [5.0 (schnell)] ... 200.0 μA , aus (Titrino)

Der Regelbereich definiert den Messwertbereich vor dem gegebenen Endpunkt. Er hat einen entscheidenden Einfluss auf die Titrationsgeschwindigkeit und damit auf die Genauigkeit. Im Regelbereich wird die Dosierung durch die **Minimale Geschwindigkeit** kontrolliert. Je näher der Endpunkt, desto langsamer wird dosiert, bis die **Minimale Geschwindigkeit** erreicht ist. Je grösser der Regelbereich, desto langsamer ist die Titration. Ausserhalb des Regelbereichs wird kontinuierlich mit **Maximaler Geschwindigkeit** dosiert (siehe Regelbereich).

Max. Geschwindigkeit

0.01 ... [1.00 (langsam)] ... [10.00 (optimal)] ... 166.00 mL/min, [maximal (schnell)] (Titrande)

0.01 ... [1.00 (langsam)] ... [10.00 (optimal)] ... 150.00 mL/min, [maximal (schnell)] (Titrino)

Geschwindigkeit, mit der ausserhalb des **Regelbereichs** dosiert wird. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Min. Geschwindigkeit

0.01 ... [5.00 (langsam)] ... [25.00 (optimal)] ... [50.00 (schnell)] ... 9999.00 $\mu\text{L}/\text{min}$

Geschwindigkeit, mit der ganz am Anfang der Titration und im **Regelbereich** am Ende der Titration dosiert wird. Je kleiner die minimale Geschwindigkeit gewählt wird, desto langsamer ist die Titration.

Stoppkriterium

Stoppkriterium

[Drift], Zeit, aus

Wenn der Endpunkt erreicht ist und das Stoppkriterium erfüllt ist, wird die Titration nach der letzten Dosierung abgebrochen. Die Titration kann beim Erreichen einer bestimmten **Drift** oder nach einer bestimmten **Zeit** abgebrochen werden. Wenn das Stoppkriterium **aus** gewählt wurde, wird die Titration nicht abgebrochen.

Hinweis

Die Abbruchbedingungen führen immer zum Abbruch, auch wenn das Stoppkriterium nicht erreicht wurde oder ausgeschaltet ist.

Stoppdrift

1 ... [20] ... 999 $\mu\text{L}/\text{min}$

Wenn der Endpunkt und die Stoppdrift erreicht sind, wird die Titration abgebrochen. Dieser Parameter wird nur für **Stoppkriterium** = **Drift** angezeigt.

Abschaltzeit

0 ... [10] ... 999 s (Titrande),

0 ... [10] ... 999 s, inf. (Titrino)

Wenn der Endpunkt erreicht ist, wird nach der letzten Dosierung die hier definierte Abschaltzeit abgewartet und dann die Titration abgebrochen. Dieser Parameter wird nur für **Stoppkriterium** = **Zeit** angezeigt. Die Auswahl **inf.** steht für infinite (unendlich).

Stopzeit

0 ... 999999 s (nur Titrino)

Die Titration wird abgebrochen, wenn seit dem Start der Titration die hier definierte Stoppzeit abgelaufen ist. Dieser Parameter wird nur für **Stoppkriterium = Zeit** und **Relative Stoppzeit = inf.** angezeigt.

Endpunkt 2

(wird nur für **EP1 bei** ≠ **aus** angezeigt)

ein, [aus]

Ein-/Ausschalten des Endpunktes 2. Ist diese Option ausgeschaltet, werden die zugehörigen Parameter nicht angezeigt.

EP2 bei

-200.0 ... 200.0 µA, [aus]

Messwert für den zweiten Endpunkt.

Parameter für **Endpunkt 2** siehe oben.

Titrationsparameter

Abbildung und Parameter: *siehe SET pH - Titrationsparameter*

Abbruchbedingungen

Abbildung und Parameter: *siehe SET pH - Abbruchbedingungen*

Konditionieren

Abbildung und Parameter: *siehe SET pH - Konditionieren*

Weitere Auswertungen

Befehlsname

25 Zeichen, [SET Upol #]

Name des Befehls.

Hier können die folgenden zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven eingeschaltet und definiert werden:

Fix-Endpunkt-Auswertung

ein, [aus]

Zu einer fixen Grösse (Messwert, Volumen oder Zeit) werden für den Fix-Endpunkt aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert.

Fixe Messgrösse

[Messwert], Zeit, Volumen

Auswahl der fixen Messgrösse, zu der aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert werden.

Fix-EP# bei

-200.0 ... 200.0 μ A, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgrösse** = **Messwert**.

Fix-EP# bei

0.0 ... 999999.9 s, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgrösse** = **Zeit**.

Fix-EP# bei

0.00000 ... 9999.99 mL, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgrösse** = **Volumen**.

9 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden zusätzlich zu den immer vorhandenen Fix-EP1...3 auch die Fix-EP4...9 angezeigt.

3 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden anstelle der Fix-EP1...9 nur noch die Fix-EP1...3 angezeigt.

Minimum-Auswertung

ein, [aus]

Zum minimalen Messwert werden aus der Messpunktliste das zugehörige Volumen, die Zeit und die Temperatur interpoliert () (siehe *Titrationenbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.5 ... [5.0] ... 10.0 μ A/mL

Die Auswertung des Minimums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Maximum-Auswertung

ein, [aus]

Zum maximalen Messwert werden aus der Messpunktliste das zugehörige Volumen, die Zeit und die Temperatur interpoliert () (siehe *Titrationenbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.5 ... [5.0] ... 10.0 μ A/mL

Die Auswertung des Maximums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: siehe *DET pH - Weitere Messwerte*

KFT


Befehl für volumetrische **Karl-Fischer-Titrationen (KFT)**.

Prinzip

Mit diesem Befehl werden volumetrische Titrations zur Wasserbestimmung nach Karl Fischer mit automatischer Konditionierung ausgeführt. Typisches Merkmal der Karl Fischer Titration ist die von der Regeldifferenz (aktueller Messwert – Endpunkt) abhängige, geregelte Reagenzdosierung, die darauf abzielt, den mit dem vorgegebenen Zielendpunkt definierten Messwert möglichst schnell und genau zu erreichen. Ein Übertitrieren wird dabei weitgehend vermieden. Der Titrationsabbruch am Endpunkt erfolgt driftkontrolliert oder nach einer Wartezeit. Das bis zum Endpunkt dosierte Volumen ergibt den verrechenbaren Reagenzverbrauch.

Während der Titration erfolgt die Reagenzdosierung in drei Phasen:

- **Anfangsdosierung**
Während dieser Phase wird die Dosiergeschwindigkeit kontinuierlich gesteigert. Sie beginnt mit der **Minimalen Geschwindigkeit** und steigt bis zur **Maximalen Geschwindigkeit**.
- **Kontinuierliche Dosierung**
Es wird so lange mit der **Maximalen Geschwindigkeit** dosiert, bis der **Regelbereich** erreicht ist.
- **Regelbereich**
In diesem Bereich wird die Dosierung fein geregelt. Kurz vor Erreichen des Endpunktes wird nur noch mit der **Minimalen Geschwindigkeit** dosiert.

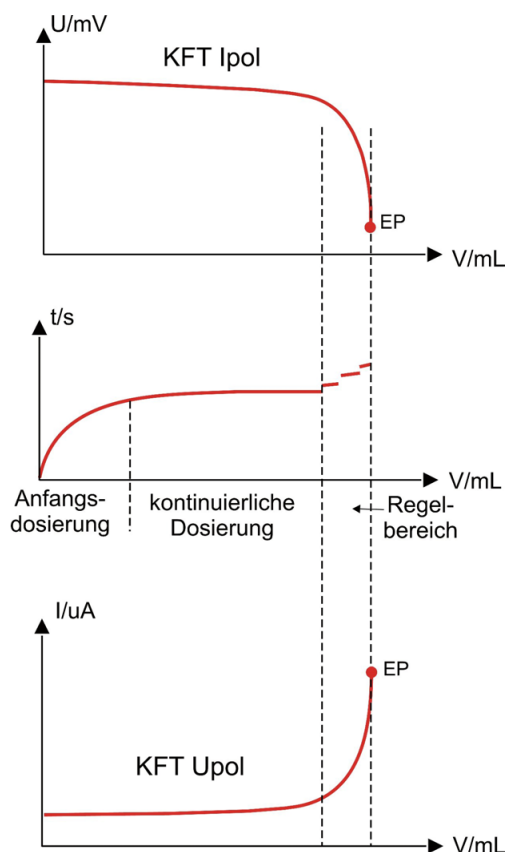

Befehle

Je nach Messwert können die folgenden zwei KFT-Befehle ausgewählt werden:

- **KFT Ipol**
Voltametrische Messung mit wählbarem Polarisationsstrom (Messgrösse Spannung U).
- **KFT Upol**
Amperometrische Messung mit wählbarer Polarisationsspannung (Messgrösse Strom I).

KFT Ipol

Befehl für **Karl-Fischer-Titrationsen** mit voltametrischer Messung (wählbarer Polarisationsstrom).

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **KFT** verfügen:


Titrimo: 720, 736, 751, 758, 784, 795, 799

Titrimo: 835, 836, 841


Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

ohne Konditionieren

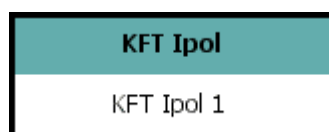

mit Konditionieren

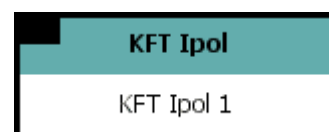

Parameter

Die Parameter für den Befehl **KFT Ipol** werden auf den folgenden 8 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Dosierer, Sensor und Rührer.
- **Startbedingungen**
Parameter für die Messung des Initialmesswertes sowie Definition der Bedingungen, die beim Start der Titration erfüllt sein müssen.
- **Regelparameter**
Regelparameter für den Endpunkt (Messwert für den Endpunkt, Titrationsgeschwindigkeit, Anwenderdefinierte Parameter, Stoppkriterium).
- **Titrationsparameter**
Parameter für Ablauf der Titration.
- **Abbruchbedingungen**
Definition der Bedingungen, die den Abbruch der Titration bewirken.
- **Konditionieren**
Ein-/Ausschalten des Konditionierens. Definition von Startdrift, Driftkorrektur und Stoppbedingungen.
- **Weitere Auswertungen**
Definition von zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten von anderen Messbefehlen, die als zusätzliche Messwertkolonnen gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

Befehlsname

25 Zeichen, [KFT Ipol #]

Name des Befehls.

Hier werden die allgemeinen Parameter zum Gerät, Dosierer, Sensor und Rührer eingestellt.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [Titrande]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Dosierer

Dosierer

[1] ... 4 (Titrande)

[intern D0] (Titrino)

extern D1, extern D2 (nur Titrino 736, 751, 758, 799)

Auswahl der Nummer des Dosierers (Wechsel- oder Dosiereinheit), mit dem die Lösung dosiert werden soll.

Lösung

24 Zeichen, Lösungsnamen, [nicht definiert]

Eingabe eines Lösungsnamens oder Auswahl eines Titriermittels aus den in der Lösungstabelle vorhandenen Lösungen. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. Wenn intelligente Wechsel- bzw. Dosiereinheiten verwendet werden, wird im Methodenablauf überprüft, ob die richtige Lösung auf dem gewählten Dosierer aufgesetzt ist und ob der Dosierertyp übereinstimmt. Für nicht-intelligente Wechsel- bzw. Dosiereinheiten wird nur das Zylindervolumen überprüft. Für das gewählte Titriermittel werden beim Start der Titration die Nutzungsdauer, die Gültigkeit des Titors und das GLP-Testintervall überprüft. Ist **nicht definiert** ausgewählt, werden keine Tests durchgeführt.

Sensor

Messeingang

[1] ... 2 (nur Titrande)

Auswahl des Messeingangs, an dem der Sensor angeschlossen ist.

Sensor

Sensorname, [Metal electrode], Conductivity sensor

Auswahl einer Elektrode aus den in der Sensortabelle vorhandenen Elektroden.

I(pol)

-125.0 ... [50.0] ... 125.0 μ A (Titrande, Schrittweite 2.5 μ A)

-127 ... [50] ... 127 μ A (Titrino, Schrittweite 1 μ A)

Der Polarisationsstrom ist der Strom, der während einer volumetrischen Messung an einer polarisierten Elektrode angelegt wird.

Elektrodentest

ein, [aus]

Ein-/ausschalten des Elektrodentests für polarisierte Elektroden. Dieser Test wird beim Übergang vom inaktiven Grundzustand in eine Messung durchgeführt.

Temperaturmessung

Art der Temperaturmessung (nur Titrande):

kontinuierlich

Es muss ein Temperaturfühler angeschlossen sein. Die Temperatur wird dann laufend gemessen.

[automatisch]

Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist, wird die Temperatur laufend gemessen. Ansonsten wird die unter **Temperatur** (Registerkarte **Titrationparameter**) manuell eingetragene Temperatur verwendet.

aus

Die Temperatur wird nicht gemessen. Die unter **Temperatur** (siehe Titrationparameter) manuell eingetragene Temperatur wird verwendet.

Rührer

Rührer

[1] ... 4, **aus** (nur Titrande)

Auswahl des Rührers. **aus** bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.

Rührgeschwindigkeit

-15 ... [8] ... 15 (nur Titrande)

Einstellen der Rührgeschwindigkeit. Mit dem Vorzeichen der Rührgeschwindigkeit ändert sich die Richtung, in der gerührt wird.

Automatisch ausschalten

[ein], **aus** (nur Titrande)

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Automatisch ein-/ausschalten

[ein], aus (nur Titrimo 751, 758, 784, 795, 799)

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer beim Start des Befehles automatisch eingeschaltet und am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Startbedingungen

Abbildung und Parameter: siehe SET pH - Startbedingungen

Regelparameter

Befehlsname

25 Zeichen, [KFT Ipol #]

Name des Befehls.

Endpunkt

EP bei

-2000.0 ... [250.0] ... 2000.0 mV, aus

Messwert für den Endpunkt.

Titrationsgeschwindigkeit

Titrationsgeschwindigkeit

Für die Titrationsgeschwindigkeit können die drei vordefinierten Parametersätze **langsam**, **optimal** und **schnell** gewählt werden, bei denen die Parameter für **Regelung** nicht angezeigt werden. Um diese Parameter editieren zu können, muss die Einstellung **Anwender** ausgewählt werden.

langsam

Für Titrationen, bei denen auch kleinste Details sichtbar sein sollen. Allerdings kann dadurch auch das Rauschen verstärkt werden, was zu unerwünschten EPs führen kann.

[optimal]

Parametersatz für alle Standardtitrationen, für die häufigsten Anwendungen optimiert.

schnell

Für wenig kritische, schnelle Titrationen.

Anwender

Anwenderdefinierte Einstellung der einzelnen Parameter, welche die Titrationsgeschwindigkeit beeinflussen.

Regelung

(wird nur für **Titrationsgeschwindigkeit** = **Anwender** angezeigt)

Regelbereich

0.1 ... [300.0 (langsam)] ... [100.0 (optimal)] ... [30.0 (schnell)] ... 2000.0 mV (Titrande),

1 ... [300 (langsam)] ... [100 (optimal)] ... [30 (schnell)] ... 2000 mV (Titrino)

Der Regelbereich definiert den Messwertbereich vor dem gegebenen Endpunkt. Er hat einen entscheidenden Einfluss auf die Titrationsgeschwindigkeit und damit auf die Genauigkeit. Im Regelbereich wird die Dosierung durch die **Minimale Geschwindigkeit** kontrolliert. Je näher der Endpunkt, desto langsamer wird dosiert, bis die **Minimale Geschwindigkeit** erreicht ist. Je grösser der Regelbereich, desto langsamer ist die Titration. Ausserhalb des Regelbereichs wird kontinuierlich mit **Maximaler Geschwindigkeit** dosiert.

Max. Geschwindigkeit

0.01 ... [1.00 (langsam)] ... [maximal (optimal)] ... [maximal (schnell)] ... 166.00 mL/min (Titrande)

0.01 ... [1.00 (langsam)] ... [maximal (optimal)] ... [maximal (schnell)], 150.00 mL/min (Titrino)

Geschwindigkeit, mit der ausserhalb des **Regelbereichs** dosiert wird. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab.

Min. Volumeninkrement

0.1 ... [minimal (langsam)] ... [minimal (optimal)] ... [5.0 (schnell)] ... 9.9 µL/min

Dieser Parameter bestimmt die Zugabegeschwindigkeit, mit der am Anfang und am Ende der Titration dosiert wird. Je kleiner dieses Inkrement gewählt wird, desto langsamer ist die Titration und desto höher ist damit die Genauigkeit.

Stoppkriterium

Stoppkriterium

[Drift], Rel. Drift, aus (nur Titrande 835, 836, 841), **Zeit**

Wenn der Endpunkt erreicht ist und das Stoppkriterium erfüllt ist, wird die Titration nach der letzten Dosierung abgebrochen. Die Titration kann beim Erreichen einer bestimmten **Drift** oder nach einer bestimmten **Zeit** abgebrochen werden. Wenn das Stoppkriterium **aus** gewählt wurde, wird die Titration nicht abgebrochen.

Hinweis

Die Abbruchbedingungen führen immer zum Abbruch, auch wenn das Stoppkriterium nicht erreicht wurde oder ausgeschaltet ist.

Stoppdrift

1 ... [20] ... 999 µL/min

Wenn der Endpunkt und die Stoppdrift erreicht sind, wird die Titration abgebrochen. Dieser Parameter wird nur für **Stoppkriterium** = **Drift** angezeigt.

Relative Stoppdrift

1 ... [10] ... 999 µL/min (nur Titrande 835, 836, 841)

Wenn der Endpunkt und die Stoppdrift erreicht sind, wird die Titration abgebrochen. Als Stoppdrift gilt der Driftwert beim Start der Titration + die hier definierte relative Stoppdrift. Dieser Parameter wird nur für **Stoppkriterium** = **Rel. Drift** angezeigt.

Abschaltzeit

0 ... [10] ... 999 s (Titrande 835, 836, 841),

0 ... [10] ... 999 s, inf. (Titrino 720, 736, 751, 758, 784, 795, 799)

Wenn der Endpunkt erreicht ist, wird nach der letzten Dosierung die hier definierte Abschaltzeit abgewartet und dann die Titration abgebrochen. Dieser

Parameter wird nur für **Stoppkriterium = Zeit** angezeigt. Die Auswahl **inf.** steht für infinite (unendlich).

Stopptime

1 ... 999999 s (nur Titrimo 720, 736, 751, 758, 784, 795, 799)

Die Titration wird abgebrochen, wenn seit dem Start der Titration die hier definierte absolute Stopptime abgelaufen ist. Dieser Parameter wird nur für **Stoppkriterium = Zeit** und **Abschaltzeit = inf.** angezeigt.

Titrimationsparameter

Befehlsname

25 Zeichen, [KFT Ipol #]
Name des Befehls.

Parameter für den Ablauf der Titration.

Titrimationsrichtung

Auswahl der Titrimationsrichtung. Wenn zwei Endpunkte gesetzt sind, ist die Titrimationsrichtung bereits festgelegt und die folgende Auswahl der **Titrimationsrichtung** wird ignoriert.

+
positive Messwertänderung
[-]
negative Messwertänderung

auto

Die Titrimationsrichtung wird automatisch aus dem Anfangsmesswert und dem gesetzten Endpunkt bestimmt.

Extraktionszeit

0 ... 999999 s

Die Titration wird nicht abgebrochen, bis die Extraktionszeit abgelaufen ist (auch wenn der EP schon erreicht ist). Die Eingabe einer Extraktionszeit ist z.B. bei der Titration schwerlöslicher Proben sinnvoll.

Temperatur

-20.0 ... [25.0] ... 150.0 °C (Titrimo)

-170.0 ... [25.0] ... 500.0 °C (Titrimo)

Titrationstemperatur, die manuell eingegeben werden kann. Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist und die **Temperaturmessung** in der Registerkarte **Allgemein/Hardware** unter **Sensor** auf **automatisch** oder **kontinuierlich** eingestellt ist, wird die Temperatur laufend gemessen.

Zeitintervall Messpunkt

0.1 ... [2.0] ... 999999 s (Titrimo)

0.08 ... [2.00] ... 16200 s (Titrimo)

Zeitintervall für den Eintrag eines Messpunktes in die Messpunktliste.

Abbruchbedingungen

Abbildung und Parameter: siehe *SET pH - Abbruchbedingungen*

Konditionieren

Abbildung und Parameter: *siehe SET pH - Konditionieren*

Weitere Auswertungen

Abbildung und Parameter: *siehe SET U - Weitere Auswertungen*

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Weitere Messwerte*

KFT Upol

Befehl für **Karl-Fischer-Titrationen** mit amperometrischer Messung (wählbare Polarisationsspannung).

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **KFT** verfügen:


Titrimo: 720, 736, 751, 758, 784, 795, 799

Titrimo: 835, 836, 841


Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

ohne Konditionieren

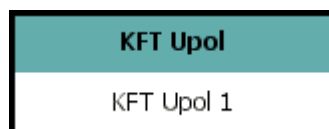

mit Konditionieren

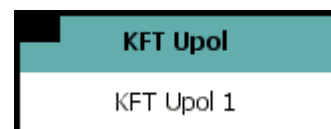

Parameter

Die Parameter für den Befehl **KFT Upol** werden auf den folgenden 8 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Dosierer, Sensor und Rührer.
- **Startbedingungen**
Parameter für die Messung des Initialmesswertes sowie Definition der Bedingungen, die beim Start der Titration erfüllt sein müssen.
- **Regelparameter**
Regelparameter für den Endpunkt (Messwert für den Endpunkt, Titrationsgeschwindigkeit, Anwenderdefinierte Parameter, Stoppkriterium).
- **Titrationparameter**
Parameter für Ablauf der Titration.
- **Abbruchbedingungen**
Definition der Bedingungen, die den Abbruch der Titration bewirken.
- **Konditionieren**
Ein-/Ausschalten des Konditionierens. Definition von Startdrift, Driftkorrektur und Stoppbedingungen.

- **Weitere Auswertungen**
Definition von zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten von anderen Messbefehlen, die als zusätzliche Messwertkolonnen gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

Abbildung und Parameter: *siehe DET Upol - Allgemein/Hardware*

Startbedingungen

Abbildung und Parameter: *siehe SET Upol - Startbedingungen*

Regelparameter

Abbildung und Parameter: *siehe SET Upol - Regelparameter*

Titrationsparameter

Abbildung und Parameter: *siehe KFT Ipol - Titrationsparameter*

Abbruchbedingungen

Abbildung und Parameter: *siehe SET pH - Abbruchbedingungen*

Konditionieren

Abbildung und Parameter: *siehe SET pH - Konditionieren*

Weitere Auswertungen

Abbildung und Parameter: *siehe SET Upol - Weitere Auswertungen*

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Weitere Messwerte*

KFC

Befehl für coulometrische **Karl-Fischer-Titrationsen** mit voltametrischer Messung.

Hinweis

Die coulometrische Wasserbestimmung vor allem für die Bestimmung kleiner Wassermengen eingesetzt.

Geräte


Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **KFC** verfügen:

Coulometer: 756, 831


Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

ohne Konditionieren

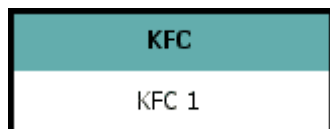

mit Konditionieren

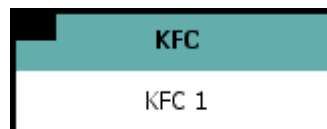

Parameter

Die Parameter für den Befehl **KFC** werden auf den folgenden 8 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Indikator- und Generatorelektrode und Rührer.
- **Startbedingungen**
Eingabe einer Wartezeit vor Beginn der Titration.
- **Regelparameter**
Regelparameter für den Endpunkt (Messwert für den Endpunkt, Titrationsgeschwindigkeit, Anwenderdefinierte Parameter, Stoppkriterium).
- **Titrationparameter**
Parameter für Ablauf der Titration.
- **Abbruchbedingungen**
Eingabe der Stoppzeit, die den Abbruch der Titration bewirkt.
- **Konditionieren**
Ein-/Ausschalten des Konditionierens. Definition von Startdrift, Driftkorrektur und Driftwert.
- **Weitere Auswertungen**
Definition von zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Titrationskurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten von anderen Messbefehlen, die als zusätzliche Messwertkolonnen gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

The screenshot shows a software window titled 'KFC - KFC 20'. At the top, there is a text field for 'Befehlsname' containing 'KFC 20'. Below this is a tabbed interface with four tabs: 'Abbruchbedingungen', 'Konditionieren', 'Weitere Auswertungen', and 'Weitere Messwerte'. The 'Allgemein/Hardware' tab is selected. Under this tab, there are four main sections: 'Gerät', 'Indikatorelektrode', 'Generatorelektrode', and 'Rührer'. The 'Gerät' section has 'Gerätename' set to 'nicht definiert' and 'Gerätetyp' set to '831 KF Coulometer'. The 'Indikatorelektrode' section has 'I(pol)' set to '10' μ A and a checked 'Elektrodentest' checkbox. The 'Generatorelektrode' section has 'Generatortyp' set to 'ohne Diaphragma' and 'Generatorstrom' set to '400' mA. The 'Rührer' section has a checked 'Automatisch ein-/ausschalten' checkbox. At the bottom right are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Befehlsname

25 Zeichen, [KFC #]

Name des Befehls.

Hier werden die allgemeinen Parameter zum Gerät, den Elektroden und dem Rührer eingestellt.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [Titrande]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Indikatorelektrode

I(pol)

2, 5, [10], 20, 30 μ A

Polarisationsstrom an der Indikatorelektrode.

Hinweis

Beim Ändern dieses Parameters sollte beachtet werden, dass der Polarisationsstrom, der Endpunkt und der Regelbereich eng miteinander verknüpft sind (Details siehe **Regelparameter**).

Elektrodentest

ein, [aus]

Ein-/ausschalten des Elektrodentests. Dieser Test wird beim Übergang vom inaktiven Grundzustand in eine Messung durchgeführt.

Generatorelektrode

Generatortyp

[ohne Diaphragma], mit Diaphragma

Auswahl des Generatortypes.

Generatorstrom

100, 200, [400], mA, auto

Polarisationsstrom an der Generatorelektrode. **auto** heisst, dass der Strom automatisch an die Leitfähigkeit des Reagenzes angepasst wird und dass der Strom in der Nähe des Endpunktes geregelt kleiner geschaltet wird.

Hinweis

Für Generatorelektroden vom Typ **mit Diaphragma** wird empfohlen, den Parameter **Generatorstrom** auf **auto** zu setzen.

Für Generatorelektroden vom Typ **ohne Diaphragma** wird empfohlen, den Parameter **Generatorstrom** auf **400 mA** zu setzen.

Rührer

Automatisch ein-/ausschalten

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer beim Start des Befehles automatisch eingeschaltet und am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Startbedingungen

Befehlsname

25 Zeichen, [KFC #]

Name des Befehls.

Pause

Pause

[0] ... 999999 s

Wartezeit vor Beginn der Titration.

Regelparameter

Befehlsname
25 Zeichen, [KFC #]
Name des Befehls.


Endpunkt

EP bei
-2000 ... [50] ... 2000 mV
Messwert für den Endpunkt.

Regelung

Regelbereich
0 ... [70] ... 2000 mV, aus
Der Regelbereich wird als Abstand vom Endpunkt eingegeben. Im Regelbereich wird in Schritten Iod erzeugt, die durch die **Minimale Geschwindigkeit** kontrolliert werden. Je grösser der Regelbereich, desto langsamer ist die Titration. Ausserhalb des Regelbereichs wird kontinuierlich mit **Maximaler Geschwindigkeit** Iod erzeugt.

Die Standard-Regelparameter sind für die meisten Anwendungen optimal und sollten nicht geändert werden. Falls Sie die Regelparameter für spezielle Reagenzien und/oder Proben trotzdem ändern müssen, ist zu beachten, dass der Polarisationsstrom der Indikatorelektrode (**I(pol)**), der Endpunkt und der Regelbereich miteinander verknüpft sind.

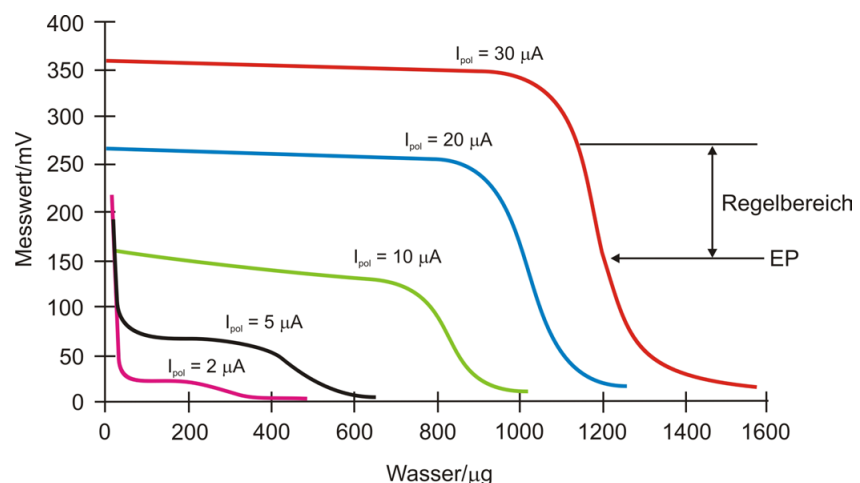

Das Diagramm zeigt KF-Titrationskurven bei unterschiedlichen Polarisationsströmen. Es ist klar ersichtlich, dass sich die Lage des Endpunktes mit dem Polarisationsstrom ändert. Die Kurven sind unterschiedlich steil, d.h. der Regelbereich muss ebenfalls angepasst werden. Polarisationsströme kleiner als 10 μA sind für diese Anwendung nicht geeignet. Die folgende Tabelle gibt eine Idee der optimalen Regelparameter bei unterschiedlichen Polarisationsströmen.

I _{pol}	10 μA	20 μA	30 μA
EP	50 mV	100 mV	150 mV
Regelbereich	70 mV	100 mV	120 mV

Max. Geschwindigkeit

1.5 ... 2240 $\mu\text{g}/\text{min}$, [maximal]

Maximale Geschwindigkeit, mit der ausserhalb des **Regelbereichs** Iod erzeugt wird.

Min. Geschwindigkeit

0.3 ... [15.0] ... 999.9 $\mu\text{g}/\text{min}$, minimal

Dieser Parameter bestimmt die minimale Geschwindigkeit, mit der innerhalb des **Regelbereichs** Iod erzeugt wird. Je kleiner die Geschwindigkeit gewählt wird, desto langsamer ist die Titration und desto höher ist damit die Genauigkeit.

Stoppkriterium

Stoppkriterium

Drift, [Rel. Drift]

Wenn der Endpunkt erreicht ist und das Stoppkriterium erfüllt ist, wird die Titration abgebrochen.

Stoppdrift

1 ... [5] ... 999 $\mu\text{g}/\text{min}$

Wenn der Endpunkt und die Stoppdrift erreicht sind, wird die Titration abgebrochen. Dieser Parameter wird nur für **Stoppkriterium = Drift** angezeigt.

Relative Stoppdrift

0 ... [5] ... 999 $\mu\text{g}/\text{min}$

Wenn der Endpunkt und die Stoppdrift erreicht sind, wird die Titration abgebrochen. Als Stoppdrift gilt der Driftwert beim Start der Titration + die hier definierte relative Stoppdrift. Dieser Parameter wird nur für **Stoppkriterium = Rel. Drift** angezeigt.

Titrationsparameter

Befehlsname

25 Zeichen, [KFC #]

Name des Befehls.

Parameter für den Ablauf der Titration.

Extraktionszeit

[0] ... 999999 s

Die Titration wird nicht abgebrochen, bis die Extraktionszeit abgelaufen ist (auch wenn der EP schon erreicht ist). Die Eingabe einer Extraktionszeit ist z.B. bei der Titration schwerlöslicher Proben sinnvoll.

Temperatur

-170.0 ... [25.0] ... 500.0 °C

Titrationstemperatur, die manuell eingegeben werden kann.

Zeitintervall Messpunkt

0.4 ... [4.0] ... 16200 s

Zeitintervall für den Eintrag eines Messpunktes in die Messpunktliste.

Abbruchbedingungen

Befehlsname

25 Zeichen, [KFC #]

Name des Befehls.

Bedingung für den Abbruch der Titration.

Stoppzeit

0 ... 999999 s, [aus]

Abbruch, wenn nach dem Start der Titration die eingegebene Zeit abgelaufen ist. **aus** bedeutet kein Abbruch.

Konditionieren

Befehlsname

25 Zeichen, [KFC #]

Name des Befehls.

Konditionieren

[ein], aus

Ein-/Ausschalten des Konditionierens. Ist das Konditionieren ausgeschaltet, werden alle nachfolgenden Parameter nicht angezeigt.

Startdrift

1 ... [20] ... 999 µg/min

Die Bestimmung kann erst gestartet werden, wenn die aktuell gemessene Drift kleiner ist als die hier eingegebende **Startdrift**. In diesem Fall wechselt der im Ablaufenster (Einzelbestimmung oder Bestimmungsserie) angezeigte Status auf **COND READY**.

Driftkorrektur

automatisch, manuell, [aus]

Ist dieser Parameter auf **automatisch** oder **manuell** eingestellt, wird der durch den Leerverbrauch während der Titration verursachte Driftabzug = **Driftwert** x Titrationszeit vom Gesamtverbrauch subtrahiert. Für **automatisch** gilt der Driftwert beim Start der Titration, für **manuell** der unter **Driftwert** definierte Wert.

Driftwert

[0] ... 99.9 µL/min

Driftwert für die Driftkorrektur. Dieser Parameter wird nur für **Driftkorrektur** = **manuell** angezeigt.

Wartezeit nach 'Cond ok'

[0] ... 999 s

Wartezeit bis zum Start der Titration, während der die Konditionierbedingung dauernd erfüllt sein muss.

Titration erst nach Startbefehl von SEND-Befehl starten

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird die Titration erst gestartet, wenn mit einem **SEND**-Befehl die **Ereignismeldung Start Titration** an den Befehl geschickt wird.

Hinweis

Beim Eintreffen des **SEND-Befehls** muss das Konditionieren bereits abgeschlossen sein (= **Condok**), ansonsten wird die Anweisung zum Starten der Titration verworfen.

Messwert beim Konditionieren anzeigen

ein, [aus]

Wird diese Option eingeschaltet, so wird zusätzlich zur Drift und Zeit auch der Messwert in der Liveanzeige angezeigt.

Weitere Auswertungen

KFC - KFC 1

Befehlsname: KFC 1

☒ Fix-Endpunkt-Auswertung

Fixe Messgröße: Messwert

Fix-EP1 bei: aus mV

Fix-EP2 bei: aus mV

Fix-EP3 bei: aus mV 9 Fix-EPs

OK Abbrechen

Befehlsname

25 Zeichen, [KFC #]

Name des Befehls.

Hier kann die folgende zusätzliche Methode zur Auswertung der Titrationskurven eingeschaltet und definiert werden:

Fix-Endpunkt-Auswertung

ein, [aus]

Zum fixen Messwert werden für den Fix-Endpunkt aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert.

Fixe Messgrösse

Messwert

Fixe Messgrösse, zu der aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert werden.

Fix-EP# bei

-2000.0 ... 2000.0 mV

Fix-Endpunkt.

9 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden zusätzlich zu den immer vorhandenen Fix-EP1...3 auch die Fix-EP4...9 angezeigt.

3 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden anstelle der Fix-EP1...9 nur noch die Fix-EP1...3 angezeigt.

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Weitere Messwerte*

Auswertung

pK-Wert und Halbneutralisationspotential


Bei pH-Titrationsen (DET und MET) kann der **pK-Wert** und bei U-Titrationsen kann das **Halbneutralisationspotential** bestimmt werden.

Die Aktivitäten von konjugierten Säure-Base-Paaren sind über die folgende Gleichung (Henderson-Hasselbach-Gleichung) miteinander verknüpft:

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log (a_B/a_A)$$

Wenn die Aktivitäten der Säure und der konjugierten Base gleich sind ($a_A = a_B$), gilt **pH = pK_a**. Das ist der Wert beim Halbneutralisationspunkt, der aus der Titrationskurve extrapoliert werden kann. Für pK-Auswertungen ist eine sorgfältige pH-Kalibrierung notwendig. Trotzdem ist der bestimmte pK-Wert eine Näherung, da die Ionenstärke nicht berücksichtigt wurde. Für genauere Werte müssen Titrationsen mit abnehmender Ionenstärke durchgeführt und die Resultate auf die Ionenstärke Null extrapoliert werden. Die pK-Auswertung in wässriger Lösung ist wegen der Nivellierung starker Säuren und dem Fehlen von Sprüngen bei sehr schwachen Säuren auf den Bereich $3.5 < \text{pK} < 10.5$ beschränkt. pK-Werte von Säuregemischen und mehrwertigen Säuren können ebenfalls bestimmt werden.

In nicht-wässrigen Lösungen wird häufig das **Halbneutralisationspotential (HNP)** anstelle des pK-Wertes verwendet. Das HNP wird gleich ausgewertet wie der pK-Wert.

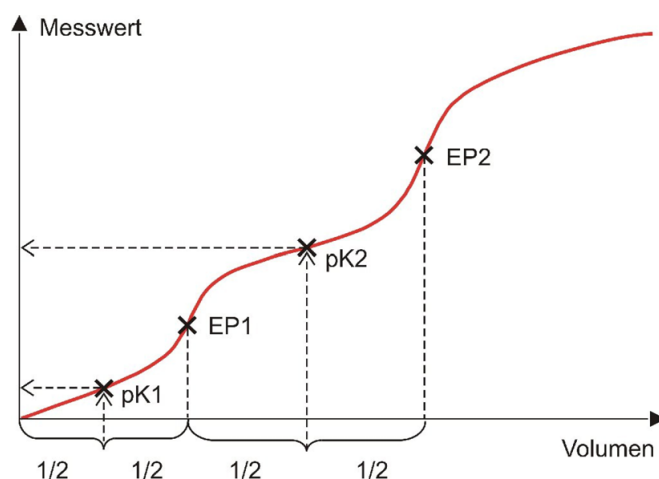


Hinweis

Wenn ein Startvolumen dosiert wird, muss dieses kleiner als $1/2 V(EP1)$ sein.


Minimum-/Maximum-Auswertung

Zum minimalen bzw. maximalen Messwert werden aus der Messpunktliste das zugehörige **Volumen**, die **Zeit** und die **Temperatur** interpoliert. Die Auswertung beginnt, sobald die Kurvensteilheit einen bestimmten Schwellenwert überschritten hat.

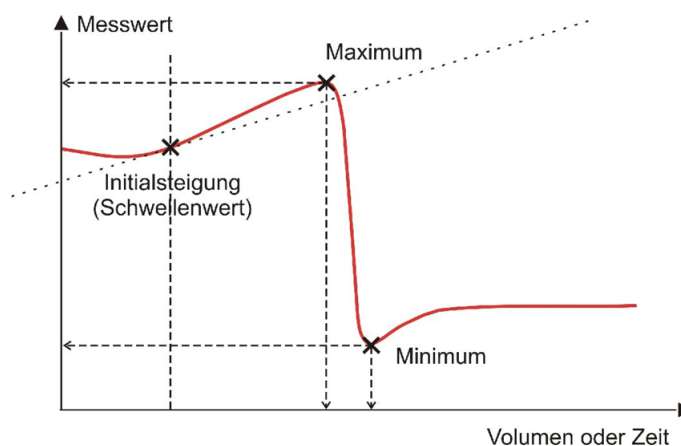

Knickpunkt-Auswertung

Mit der Knickpunktauswertung werden scharfe Richtungsänderungen in der Titrationskurve bestimmt. Diese Auswertung wird vor allen Dingen für photometrische Titrationskurven und für Leitfähigkeitstitrationskurven verwendet. Das Verfahren beruht darauf, dass Extreme in der 2. Ableitung der Kurve gesucht werden.

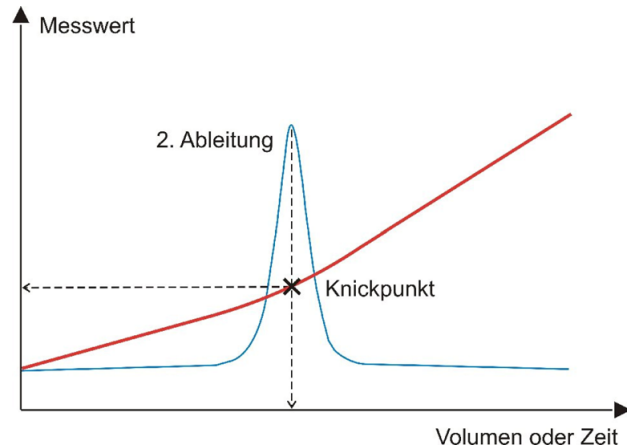

5.6.6 Messbefehle

Befehle für **Messungen** mit diversen Messgrößen.

Arten

Es können die folgenden acht Mess-Befehle ausgewählt werden:

- **MEAS pH**
Potentiometrische pH-Messung mit pH-Elektroden.
- **MEAS U**
Potentiometrische Spannungsmessung mit Metallelektroden.
- **MEAS Ipol**
Voltametrische Messung mit wählbarem Polarisationsstrom (Messgrösse Spannung U).
- **MEAS Upol**
Amperometrische Messung mit wählbarer Polarisationsspannung (Messgrösse Strom I).
- **MEAS T**
Temperaturmessung.
- **MEAS T/Flow**
Temperatur- und Gasflussmessung.
- **MEAS Conc**
Konzentrationsmessung (Direktmessung).
- **MEAS Cond**
Leitfähigkeitsmessung.

MEAS pH

Befehl für potentiometrische **pH-Messungen** mit pH-Elektroden.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **MEAS pH** verfügen:

Titrimo: 702, 716, 718, 719, 720, 721, 736, 751, 758, 785, 794, 798, 799

Titrando: 808, 809, 835, 836, 841

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

MEAS pH
MEAS pH 1

Parameter

Die Parameter für den Befehl **MEAS pH** werden auf den folgenden 4 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Sensor und Rührer.
- **Messparameter**
Parameter zur Einstellung des Messvorgangs.
- **Auswertungen**
Definieren von weiteren Methoden zur Auswertung der Messkurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten, die als zusätzliche Kolonnen in der Messpunktliste gespeichert werden.
-

Allgemein/Hardware

Befehlsname

25 Zeichen, [MEAS pH #]

Name des Befehls.

Hier werden die allgemeinen Parameter zum Gerät, Sensor und Rührer eingestellt.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [Titrando]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Sensor

Messeingang

[1] ... 2 (Titrande)

[1] ... 2, diff. (Titrino)

Auswahl des Messeinganges, an dem der Sensor angeschlossen ist.

Sensor

Sensorname, [pH electrode]

Auswahl eines pH-Sensors aus den in der Sensortabelle vorhandenen pH-Sensoren.

Temperaturmessung

Art der Temperaturmessung (nur Titrande):

kontinuierlich

Es muss ein Temperaturfühler angeschlossen sein. Die Temperatur wird dann laufend gemessen.

[automatisch]

Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist, wird die Temperatur laufend gemessen. Ansonsten wird die unter **Temperatur** (siehe **Messparameter**) manuell eingetragene Temperatur verwendet.

aus

Die Temperatur wird nicht gemessen. Die unter **Temperatur** (siehe **Messparameter**) manuell eingetragene Temperatur wird verwendet.

Rührer

Rührer

[1] ... 4, aus (nur Titrande)

Auswahl des Rührers. **aus** bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.

Rührgeschwindigkeit

-15 ... [8] ... 15 (nur Titrande)

Einstellen der Rührgeschwindigkeit. Mit dem Vorzeichen der Rührgeschwindigkeit ändert sich die Richtung, in der gerührt wird.

Automatisch ausschalten

[ein], aus (nur Titrande)

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Messparameter

Befehlsname

25 Zeichen, [MEAS pH #]

Name des Befehls.

Auf dieser Registerkarte können die Parameter für den Messvorgang eingestellt werden.

Messung

Zur Auswahl stehen die zwei Messarten **Messung mit Driftkontrolle** oder **Messung ohne Driftkontrolle**.

Hinweis

Ein konstanter Messwert wird oft erst nach einer gewissen Zeit erreicht, da die Durchmischung und eventuell die Reaktion selbst eine bestimmte Zeit benötigen. Ausserdem kann sich die Ansprechzeit einer Elektrode mit der Zeit erhöhen, d. h. das Erreichen eines konstanten Messwertes dauert immer länger. Besonders in diesem Fall ist eine **driftkontrollierte Messung** sinnvoll, da die Messwerte erst übernommen werden, wenn der Gleichgewichtszustand nahezu erreicht ist.

Messung mit Driftkontrolle

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, so wird driftkontrolliert gemessen. Die Messung wird abgebrochen, sobald die definierte **Messwertdrift** oder der **Stoppmesswert pH** erreicht ist oder eine definierte **Wartezeit** abgelaufen ist. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.

Messwertdrift

0.1 ... [10.0] ... 999.0 mV/min (Titrando)

0.5 ... [10.0] ... 999.0 mV/min (Titrino)

Der Messwert wird erst übernommen, wenn die hier definierte Messwertdrift unterschritten ist.

Min. Wartezeit

[0] ... 999'999 s (nur Titrando)

Die Messwertübernahme erfolgt erst nach Ablauf der minimalen Wartezeit, auch wenn die Messwertdrift schon erreicht ist. Während des Ablaufs der minimalen Wartezeit wird die Drift weiterhin kontrolliert.

Max. Wartezeit

0 ... [52] ... 999'999 s (Titrande)

0 ... [52] ... 9'999 s (Titrino)

Wenn die Messwertdrift noch nicht erreicht ist, erfolgt die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit. Falls die Wartezeit nicht neu eingegeben wurde, wird automatisch eine zur Drift passende Wartezeit nach folgender Formel berechnet:

$$\text{Wartezeit} = 150 / \sqrt{\text{Drift} + 0.01} + 5$$

Messintervall

0.1 ... [2.0] ... 999'999.0 s (Titrande, Schrittweite 0.1 s)

0.08 ... [2.0] ... 16'200 s (Titrino, Schrittweite 0.08 s)

Zeitintervall für den Eintrag eines Messpunktes in die Messpunktliste.

Stoppmesswert pH

-20.000 ... 20.000, [aus] (nur Titrande)

Abbruch, wenn seit dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird. **aus** bedeutet kein Abbruch.

Messung ohne Driftkontrolle

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, so wird ohne Driftkontrolle gemessen. Gemessen wird solange, bis eines der beiden Abbruchkriterien **Messdauer** oder **Stoppmesswert pH** erfüllt ist. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.

Messdauer

0 ... [120] ... 999'999 s

Maximale Zeit, während der gemessen wird.

Messintervall

0.1 ... [2.0] ... 999'999.0 s (Titrande, Schrittweite 0.1 s)

0.08 ... [2.0] ... 16'200 s (Titrino, Schrittweite 0.08 s)

Zeitintervall für den Eintrag eines Messpunktes in die Messpunktliste.

Stoppmesswert pH

-20.000 ... 20.000, [aus] (nur Titrande)

Abbruch, wenn seit dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird. **aus** bedeutet kein Abbruch.

Temperatur

Temperatur

-20.0 ... [25.0] ... 150 °C (Titrande)

-170.0 ... [25.0] ... 500 °C (Titrino)

Titrationstemperatur, die manuell eingegeben werden kann. Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist und die **Temperaturmessung** in der Registerkarte Allgemein/Hardware unter **Sensor** auf **automatisch** oder **kontinuierlich** eingestellt ist, wird die Temperatur laufend gemessen. Der Wert wird für die Temperaturkorrektur bei der pH-Messung verwendet.

Auswertungen

Befehlsname
25 Zeichen, [MEAS pH #]
Name des Befehls.

Hier können die folgenden Methoden zur Auswertung der Messkurven eingeschaltet und definiert werden.

Fix-Endpunkt-Auswertung

ein, [aus]

Zu einer fixen Grösse (**Messwert** oder **Zeit**) werden für den Fix-Endpunkt aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert.

Fixe Messgröße

[Messwert], Zeit

Auswahl der fixen Messgröße, zu der aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert werden.

Fix-EP# bei pH

-20.000 ... 20.000, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgröße** = **Messwert**.

Fix-EP# bei

0.0 ... 999'999.9 s, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgröße** = **Zeit**.

9 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden zusätzlich zu den immer vorhandenen Fix-EP1...3 auch die Fix-EP4...9 angezeigt.

3 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden anstelle der Fix-EP1...9 nur noch die Fix-EP1...3 angezeigt.

Minimum-Auswertung

ein, [aus]

Zum minimalen Messwert werden aus der Messpunktliste die zugehörige Zeit und die Temperatur interpoliert) (siehe *Titrationenbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.1 ... [1.0] ... 20.0 pH/s

Die Auswertung des Minimums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Maximum-Auswertung

ein, [aus]

Zum maximalen Messwert werden aus der Messpunktliste die zugehörige Zeit und die Temperatur interpoliert) (siehe *Titrationenbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.1 ... [1.0] ... 20.0 pH/s

Die Auswertung des Maximums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Knickpunkt-Auswertung

ein, [aus] (nur Titrande)

Mit der Knickpunkt-Auswertung werden scharfe Richtungsänderungen in der Messkurve bestimmt) (siehe *Titrationenbefehle - Auswertung - Knickpunkt-Auswertung*).

EP-Kriterium

0 ... [0.3] ... 1.0

Mass für die minimale Schärfe des Knicks. Je kleiner das EP-Kriterium gesetzt wird, desto mehr Knickpunkte werden gefunden. Da es sich um einen relativen Wert bezogen auf die Gesamtmesswertänderung handelt, können bei einem kleinen Messwertbereich schon kleine Messwertänderungen als Knick ausgewertet werden.

Steilheit

0.0 ... [0.9] ... 10.0

Minimale Differenz zwischen der Steilheit vor und nach dem Knickpunkt. Je kleiner die Differenz, desto mehr Knickpunkte werden gefunden.

Glättungsfaktor

2 ... [5] ... 20

Je höher der Glättungsfaktor, desto weniger Endpunkte werden gefunden.

Fenster

Messwert, Zeit, [aus]

Auf der Messwertachse oder auf der Zeitachse kann ein Bereich (Fenster) definiert werden. Die Knickpunkt-Auswertung erfolgt nur im vorgegebenen Fenster. Es wird jeweils nur der erste Knickpunkt anerkannt, der innerhalb des gesetzten Fensters liegt.

Untere Grenze pH

[-20.000] ... 20.000 (für **Fenster = Messwert**)

Messwert für die untere Grenze des Fensters.

Untere Grenze

[0] ... 999'999 s (für **Fenster = Zeit**)

Zeit für die untere Grenze des Fensters.

Obere Grenze pH

-20.000 ... [20.000] (für **Fenster = Messwert**)

Messwert für die obere Grenze des Fensters.

Obere Grenze

0 ... [999'999] s (für **Fenster = Zeit**)

Zeit für die obere Grenze des Fensters.

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Weitere Messwerte*

MEAS U

Befehl für potentiometrische **Spannungs-Messungen**.

Geräte


Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **MEAS U** verfügen:

Titrimo: 702, 716, 718, 719, 720, 721, 736, 751, 758, 785, 794, 798, 799

Titrando: 808, 809, 835, 836, 841

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

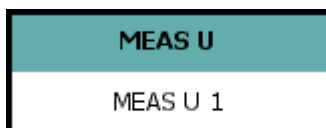

Parameter

Die Parameter für den Befehl **MEAS U** werden auf den folgenden 4 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Sensor und Rührer.
- **Messparameter**
Parameter zur Einstellung des Messvorgangs.
- **Auswertungen**
Definieren von weiteren Methoden zur Auswertung der Messkurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten, die als zusätzliche Kolonnen in der Messpunktliste gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

MEAS U - MEAS U 3

Befehlsname: MEAS U 3

Registerkarten: Messparameter, Auswertungen, Weitere Messwerte

Allgemein/Hardware

Gerät

Gerätename: nicht definiert

Gerätetyp: Titrando

Sensor

Messeingang: 1

Sensor: Metal electrode

Temperaturmessung: automatisch

Rührer

Rührer: 1

Rührgeschwindigkeit: 8

☒ Automatisch ausschalten

OK Abbrechen

Befehlsname**25 Zeichen, [MEAS U #]**

Name des Befehls.

Hier werden die allgemeinen Parameter zum Gerät, Sensor und Rührer eingestellt.

Gerät**Gerätename****Gerätename, [nicht definiert]**

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp**Gerätetypen, [Titrando]**

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Sensor**Messeingang****[1] ... 2 (Titrande)****[1] ... 2, diff. (Titrino)**

Auswahl des Messeinganges, an dem der Sensor angeschlossen ist.

Sensor**Sensorname, pH electrode, [Metal electrode], ISE electrode, Conductivity sensor**

Auswahl einer Elektrode aus den in der Sensortabelle vorhandenen Elektroden.

Temperaturmessung

Art der Temperaturmessung (nur Titrande):

kontinuierlich

Es muss ein Temperaturfühler angeschlossen sein. Die Temperatur wird dann laufend gemessen.

[automatisch]

Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist, wird die Temperatur laufend gemessen. Ansonsten wird die unter Temperatur (siehe Messparameter) manuell eingetragene Temperatur verwendet.

ausDie Temperatur wird nicht gemessen. Die unter **Temperatur** (siehe Messparameter) manuell eingetragene Temperatur wird verwendet.**Rührer****Rührer****[1] ... 4, aus (nur Titrande)**Auswahl des Rührers. **aus** bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.**Rührgeschwindigkeit****-15 ... [8] ... 15 (nur Titrande)**

Einstellen der Rührgeschwindigkeit. Mit dem Vorzeichen der Rührgeschwindigkeit ändert sich die Richtung, in der gerührt wird.

Automatisch ausschalten**[ein], aus (nur Titrande)**

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Messparameter

Befehlsname

25 Zeichen, [MEAS U #]

Name des Befehls.

Auf dieser Registerkarte können die Parameter für den Messvorgang eingestellt werden.

Messung

Zur Auswahl stehen die zwei Messarten **Messung mit Driftkontrolle** oder **Messung ohne Driftkontrolle**.

Hinweis

Ein konstanter Messwert wird oft erst nach einer gewissen Zeit erreicht, da die Durchmischung und eventuell die Reaktion selbst eine bestimmte Zeit benötigen. Ausserdem kann sich die Ansprechzeit einer Elektrode mit der Zeit erhöhen, d.h. das Erreichen eines konstanten Messwertes dauert immer länger. Besonders in diesem Fall ist eine **driftkontrollierte Messung** sinnvoll, da die Messwerte erst übernommen werden, wenn der Gleichgewichtszustand nahezu erreicht ist.

Messung mit Driftkontrolle

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, so wird driftkontrolliert gemessen. Die Messung wird abgebrochen, sobald die definierte **Messwertdrift** oder der **Stoppmesswert** erreicht ist oder eine definierte **Wartezeit** abgelaufen ist. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.

Messwertdrift

0.1 ... [10.0] ... 999.0 mV/min (Titrando)

0.5 ... [10.0] ... 999.0 mV/min (Titrino)

Der Messwert wird erst übernommen, wenn die hier definierte Messwertdrift unterschritten ist.

Min. Wartezeit

[0] ... 999'999 s (nur Titrando)

Die Messwertübernahme erfolgt erst nach Ablauf der minimalen Wartezeit, auch wenn die Messwertdrift schon erreicht ist. Während des Ablaufs der minimalen Wartezeit wird die Drift weiterhin kontrolliert.

Max. Wartezeit

0 ... [52] ... 999'999 s (Titrande)

0 ... [52] ... 9'999 s (Titrino)

Wenn die Messwertdrift noch nicht erreicht ist, erfolgt die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit. Falls die Wartezeit nicht neu eingegeben wurde, wird automatisch eine zur Drift passende Wartezeit nach folgender Formel berechnet:

$$\text{Wartezeit} = 150 / \sqrt{\text{Drift} + 0.01} + 5$$

Messintervall

0.1 ... [2.0] ... 999'999.0 s (Titrande, Schrittweite 0.1 s)

0.08 ... [2.0] ... 16'200 s (Titrino, Schrittweite 0.08 s)

Zeitintervall für den Eintrag eines Messpunktes in die Messpunktliste.

Stoppmesswert

-2'000.0 ... 2'000.0 mV, [aus] (nur Titrande)

Abbruch, wenn seit dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird. **aus** bedeutet kein Abbruch.

Messung ohne Driftkontrolle

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, so wird ohne Driftkontrolle gemessen. Gemessen wird solange, bis eines der beiden Abbruchkriterien **Messdauer** oder **Stoppmesswert** erfüllt ist. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.

Messdauer

0 ... [120] ... 999'999 s

Maximale Zeit, während der gemessen wird.

Messintervall

0.1 ... [2.0] ... 999'999.0 s (Titrande, Schrittweite 0.1 s)

0.08 ... [2.0] ... 16'200 s (Titrino, Schrittweite 0.08 s)

Zeitintervall für den Eintrag eines Messpunktes in die Messpunktliste.

Stoppmesswert

-2'000.0 ... 2'000.0, [aus] (nur Titrande)

Abbruch, wenn seit dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird. **aus** bedeutet kein Abbruch.

Temperatur

Temperatur

-20.0 ... [25.0] ... 150 °C (Titrande)

-170.0 ... [25.0] ... 500 °C (Titrino)

Titrationstemperatur, die manuell eingegeben werden kann. Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist und die **Temperaturmessung** in der Registerkarte Allgemein / Hardware unter **Sensor** auf **automatisch** oder **kontinuierlich** eingestellt ist, wird die Temperatur laufend gemessen.

Auswertungen

Befehlsname
25 Zeichen, [MEAS U #]
 Name des Befehls.

Hier können die folgenden zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Messkurven eingeschaltet und definiert werden.

Fix-Endpunkt-Auswertung

ein, [aus]

Zu einer fixen Grösse (Messwert oder Zeit) werden für den Fix-Endpunkt aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert.

Fixe Messgröße

[Messwert], Zeit

Auswahl der fixen Messgröße, zu der aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert werden.

Fix-EP# bei

-2'000.0 ... 2'000.0 mV, [aus] (Titrand)

-2'000 ... 2'000 mV, [aus] (Titrino)

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgröße** = **Messwert**.

Fix-EP# bei

0.0 ... 999'999.9 s, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgröße** = **Zeit**.

9 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden zusätzlich zu den immer vorhandenen Fix-EP1...3 auch die Fix-EP4...9 angezeigt.

3 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden anstelle der Fix-EP1...9 nur noch die Fix-EP1...3 angezeigt.

Minimum-Auswertung

ein, [aus]

Zum minimalen Messwert werden aus der Messpunktliste die zugehörige Zeit und die Temperatur interpoliert) (siehe *Titrationenbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

1.0 ... [25.0] ... 2'000.0 mV/s

Die Auswertung des Minimums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Maximum-Auswertung

ein, [aus]

Zum maximalen Messwert werden aus der Messpunktliste die zugehörige Zeit und die Temperatur interpoliert) (siehe *Titrationenbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

1.0 ... [25.0] ... 2'000.0 mV/s

Die Auswertung des Maximums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Knickpunkt-Auswertung

ein, [aus] (nur Titrande)

Mit der Knickpunkt-Auswertung werden scharfe Richtungsänderungen in der Messkurve bestimmt) (siehe *Titrationenbefehle - Auswertung - Knickpunkt-Auswertung*).

EP-Kriterium

0 ... [0.3] ... 1.0

Mass für die minimale Schärfe des Knicks. Je kleiner das EP-Kriterium gesetzt wird, desto mehr Knickpunkte werden gefunden. Da es sich um einen relativen Wert bezogen auf die Gesamtmesswertänderung handelt, können bei einem kleinen Messwertbereich schon kleine Messwertänderungen als Knick ausgewertet werden.

Steilheit

0.0 ... [0.9] ... 10.0

Minimale Differenz zwischen der Steilheit vor und nach dem Knickpunkt. Je kleiner die Differenz, desto mehr Knickpunkte werden gefunden.

Glättungsfaktor

2 ... [5] ... 20

Je höher der Glättungsfaktor, desto weniger Endpunkte werden gefunden.

Fenster

Messwert, Zeit, [aus]

Auf der Messwertachse oder auf der Zeitachse kann ein Bereich (Fenster) definiert werden. Die Knickpunkt-Auswertung erfolgt nur im vorgegebenen Fenster. Es wird jeweils nur der erste Knickpunkt anerkannt, der innerhalb des gesetzten Fensters liegt.

Untere Grenze

[-2'000.0] ... 2'000.0 mV (für **Fenster = Messwert**)

[0] ... 999'999 s (für **Fenster = Zeit**)

Messwert für die untere Grenze des Fensters.

Obere Grenze

-2'000.0 ... [2'000.0] mV (für **Fenster** = **Messwert**)

0 ... [999'999] s (für **Fenster** = **Zeit**)

Messwert für die obere Grenze des Fensters.

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Weitere Messwerte*

MEAS Ipol

Befehl für **voltametrische Messungen** mit wählbarem Polarisationsstrom.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **MEAS Ipol** verfügen:

Titrimo: 702, 716, 718, 719, 720, 721, 736, 751, 758, 785, 794, 798, 799

Titrando: 808, 809, 835, 836, 841

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **MEAS Ipol** werden auf den folgenden 4 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Sensor und Rührer.
- **Messparameter**
Parameter zur Einstellung des Messvorgangs.
- **Auswertungen**
Definieren von weiteren Methoden zur Auswertung der Messkurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten, die als zusätzliche Kolonnen in der Messpunktliste gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

Befehlsname

25 Zeichen, [MEAS Ipol #]

Name des Befehls.

Hier werden die allgemeinen Parameter zum Gerät, Sensor und Rührer eingestellt.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [Titrande]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Sensor

Messeingang

[1] ... 2 (Titrande)

[1] ... 2, diff. (Titrino)

Auswahl des Messeinganges, an dem der Sensor angeschlossen ist.

Sensor

Sensorname, [Metal electrode], Conductivity sensor

Auswahl einer Elektrode aus den in der Sensortabelle vorhandenen Elektroden.

I(pol)

-125.0 ... [5.0] ... 125.0 µA (Titrande, Schrittweite 2.5 µA)

-127 ... [5] ... 127 µA (Titrino, Schrittweite 1 µA)

Der Polarisationsstrom ist der Strom, der während einer voltametrischen Messung an einer polarisierten Elektrode angelegt wird.

Elektrodentest

ein, [aus]

Ein-/Ausschalten des Elektrodentests für polarisierte Elektroden. Dieser Test wird beim Übergang vom inaktiven Grundzustand in eine Messung durchgeführt. Dabei wird überprüft, ob eine Elektrode angeschlossen und kein Kurzschluss vorhanden ist.

Temperaturmessung

Art der Temperaturmessung (nur Titrand):

kontinuierlich

Es muss ein Temperatursensor angeschlossen sein. Die Temperatur wird dann laufend gemessen.

[automatisch]

Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist, wird die Temperatur laufend gemessen. Ansonsten wird die unter Temperatur (siehe Messparameter) manuell eingetragene Temperatur verwendet.

aus

Die Temperatur wird nicht gemessen. Die unter **Temperatur** (siehe Messparameter) manuell eingetragene Temperatur wird verwendet.

Rührer

Rührer

[1] ... 4, aus (nur Titrand)

Auswahl des Rührers. **aus** bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.

Rührgeschwindigkeit

-15 ... [8] ... 15 (nur Titrand)

Einstellen der Rührgeschwindigkeit. Mit dem Vorzeichen der Rührgeschwindigkeit ändert sich die Richtung, in der gerührt wird.

Automatisch ausschalten

[ein], aus (nur Titrand)

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Messparameter

Abbildung und Parameter: *siehe MEAS U - Messparameter*

Auswertungen

Abbildung und Parameter: *siehe MEAS U - Auswertungen*

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Weitere Messwerte*

MEAS Upol

Befehl für **amperometrische Messungen** mit wählbarer Polarisationsspannung.

Geräte


Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **MEAS Upol** verfügen:

Titrimo: 702, 716, 718, 719, 720, 721, 736, 751, 758, 785, 794, 798, 799

Titrando: 808, 809, 835, 836, 841

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

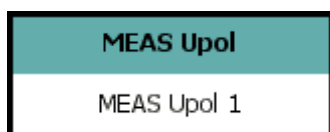

Parameter

Die Parameter für den Befehl **MEAS Upol** werden auf den folgenden 4 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Sensor und Rührer.
- **Messparameter**
Parameter zur Einstellung des Messvorgangs.
- **Auswertungen**
Definieren von weiteren Methoden zur Auswertung der Messkurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten, die als zusätzliche Kolonnen in der Messpunktliste gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

MEAS Upol - MEAS Upol 5

Befehlsname: MEAS Upol 5

Tab: Allgemein/Hardware

Gerät

Gerätename: nicht definiert

Gerätetyp: Titrando

Sensor

Messeingang: 1

Sensor: Metal electrode

U(pol): 400 mV

☐ Elektrodentest

Temperaturmessung: automatisch

Rührer

Rührer: 1

Rührgeschwindigkeit: 8

☒ Automatisch ausschalten

OK Abbrechen

Befehlsname
25 Zeichen, [MEAS Upol #]
 Name des Befehls.

Hier werden die allgemeinen Parameter zum Gerät, Sensor und Rührer eingestellt.

Gerät

Gerätename
Gerätename, [nicht definiert]
 Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp
Gerätetypen, [Titrando]
 Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.
 Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Sensor

Messeingang
[1] ... 2 (Titrande)
[1] ... 2, diff. (Titrino)
 Auswahl des Messeinganges, an dem der Sensor angeschlossen ist.

Sensor
Sensorname, [Metal electrode], Conductivity sensor
 Auswahl einer Elektrode aus den in der Sensortabelle vorhandenen Elektroden.

U(pol)
-1'250 ... [400] ... 1'250 mV (Titrande: Schrittweite 25 mV)
-1'270 ... [400] ... 1'270 mV (Titrino: Schrittweite 10 mV)
 Die Polarisationsspannung ist die Spannung, die während einer amperometrischen Messung an einer polarisierten Elektrode angelegt wird.

Elektrodentest
ein, [aus]
 Ein-/Ausschalten des Elektrodentests für polarisierte Elektroden. Dieser Test wird beim Übergang vom inaktiven Grundzustand in eine Messung durchgeführt. Dabei wird überprüft, ob eine Elektrode angeschlossen und kein Kurzschluss vorhanden ist.

Temperaturmessung
 Art der Temperaturmessung (nur Titrando):
kontinuierlich
 Es muss ein Temperaturfühler angeschlossen sein. Die Temperatur wird dann laufend gemessen.
[automatisch]
 Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist, wird die Temperatur laufend gemessen. Ansonsten wird die unter Temperatur (siehe Messparameter) manuell eingetragene Temperatur verwendet.
aus
 Die Temperatur wird nicht gemessen. Die unter **Temperatur** (siehe Messparameter) manuell eingetragene Temperatur wird verwendet.

Rührer

Rührer

[1] ... 4, **aus** (nur Titrand)

Auswahl des Rührers. **aus** bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.

Rührgeschwindigkeit

-15 ... [8] ... 15 (nur Titrand)

Einstellen der Rührgeschwindigkeit. Mit dem Vorzeichen der Rührgeschwindigkeit ändert sich die Richtung, in der gerührt wird.

Automatisch ausschalten

[ein], **aus** (nur Titrand)

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Messparameter

Befehlsname

25 Zeichen, [MEAS Upol #]

Name des Befehls.

Auf dieser Registerkarte können die Parameter für den Messvorgang eingestellt werden.

Messung

Zur Auswahl stehen die zwei Messarten **Messung mit Driftkontrolle** oder **Messung ohne Driftkontrolle**.

Hinweis

Ein konstanter Messwert wird oft erst nach einer gewissen Zeit erreicht, da die Durchmischung und eventuell die Reaktion selbst eine bestimmte Zeit benötigen. Ausserdem kann sich die Ansprechzeit einer Elektrode mit der Zeit erhöhen, d.h. das Erreichen eines konstanten Messwertes dauert immer länger. Besonders in diesem Fall ist eine **driftkontrollierte Messung** sinnvoll, da die Messwerte erst übernommen werden, wenn der Gleichgewichtszustand nahezu erreicht ist.

Messung mit Driftkontrolle

[ein], **aus**

Ist diese Option eingeschaltet, so wird driftkontrolliert gemessen. Die Messung wird abgebrochen, sobald die definierte **Messwertdrift** oder der

Stoppmesswert erreicht ist oder eine definierte **Wartezeit** abgelaufen ist. Ist diese Option nicht angewählt, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.

Messwertdrift

0.01 ... [10.00] ... 99.90 µA/min (Titrande)

0.05 ... [10.0] ... 99.9 µA/min (Titrino)

Der Messwert wird erst übernommen, wenn die hier definierte Messwertdrift unterschritten ist.

Min. Wartezeit

[0] ... 999'999 s (nur Titrande)

Die Messwertübernahme erfolgt erst nach Ablauf der minimalen Wartezeit, auch wenn die Messwertdrift schon erreicht ist. Während des Ablaufs der minimalen Wartezeit wird die Drift weiterhin kontrolliert.

Max. Wartezeit

0 ... [52] ... 999'999 s (Titrande)

0 ... [52] ... 9'999 s (Titrino)

Wenn die Messwertdrift noch nicht erreicht ist, erfolgt die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit. Falls die Wartezeit nicht neu eingegeben wurde, wird automatisch eine zur Drift passende Wartezeit nach folgender Formel berechnet:

$$\text{Wartezeit} = 150 / \sqrt{\text{Drift} + 0.01} + 5$$

Messintervall

0.1 ... [2.0] ... 999'999.0 s (Titrande, Schrittweite 0.1 s)

0.08 ... [2.0] ... 16'200 s (Titrino, Schrittweite 0.08 s)

Zeitintervall für den Eintrag eines Messpunktes in die Messpunktliste.

Stoppmesswert

-200.0 ... 200.0 µA, [aus] (nur Titrande)

Abbruch, wenn seit dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird. **aus** bedeutet kein Abbruch.

Messung ohne Driftkontrolle

[ein], aus

Wird diese Option eingeschaltet, so wird ohne Driftkontrolle gemessen.

Gemessen wird solange, bis eines der beiden Abbruchkriterien **Messdauer** oder **Stoppmesswert** erfüllt ist. Ist diese Option ausgeschaltet, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.

Messdauer

0 ... [120] ... 999'999 s

Maximale Zeit, während der gemessen wird.

Messintervall

0.1 ... [2.0] ... 999'999.0 s (Titrande, Schrittweite 0.1 s)

0.08 ... [2.0] ... 16'200 s (Titrino, Schrittweite 0.08 s)

Zeitintervall für den Eintrag eines Messpunktes in die Messpunktliste.

Stoppmesswert

-200.0 ... 200.0 µA, [aus] (nur Titrande)

Abbruch, wenn seit dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird. **aus** bedeutet kein Abbruch.

Temperatur

Temperatur

-20.0 ... [25.0] ... 150 °C (Titrande)

-170.0 ... [25.0] ... 500 °C (Titrino)

Titrationstemperatur, die manuell eingegeben werden kann. Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist und die **Temperaturmessung** in der Registerkarte Allgemein / Hardware unter **Sensor** auf **automatisch** oder **kontinuierlich** eingestellt ist, wird die Temperatur laufend gemessen.

Auswertungen

Befehlsname

25 Zeichen, [MEAS Upol #]

Name des Befehls.

Hier können die folgenden zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Messkurven eingeschaltet und definiert werden.

Fix-Endpunkt-Auswertung

ein, [aus]

Zu einer fixen Grösse (Messwert oder Zeit) werden für den Fix-Endpunkt aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert.

Fixe Messgröße

[Messwert], Zeit

Auswahl der fixen Messgröße, zu der aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert werden.

Fix-EP# bei

-200.0 ... 200.0 µA, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgröße** = **Messwert**.

Fix-EP# bei

0.0 ... 999'999.9 s, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgröße** = **Zeit**.

9 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden zusätzlich zu den immer vorhandenen Fix-EP1...3 auch die Fix-EP4...9 angezeigt.

3 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden anstelle der Fix-EP1...9 nur noch die Fix-EP1...3 angezeigt.

Minimum-Auswertung

ein, [aus]

Zum minimalen Messwert werden aus der Messpunktliste die zugehörige Zeit und die Temperatur interpoliert) (siehe *Titrationsebefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.5 ... [5.0] ... 10.0 $\mu\text{A/s}$

Die Auswertung des Minimums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Maximum-Auswertung

ein, [aus]

Zum maximalen Messwert werden aus der Messpunktliste die zugehörige Zeit und die Temperatur interpoliert) (siehe *Titrationsebefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.5 ... [5.0] ... 10.0 $\mu\text{A/s}$

Die Auswertung des Maximums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Knickpunkt-Auswertung

ein, [aus] (nur Titrande)

Mit der Knickpunkt-Auswertung werden scharfe Richtungsänderungen in der Messkurve bestimmt) (siehe *Titrationsebefehle - Auswertung - Knickpunkt-Auswertung*).

EP-Kriterium

0 ... [0.3] ... 1.0

Mass für die minimale Schärfe des Knicks. Je kleiner das EP-Kriterium gesetzt wird, desto mehr Knickpunkte werden gefunden. Da es sich um einen relativen Wert bezogen auf die Gesamtmesswertänderung handelt, können bei einem kleinen Messwertbereich schon kleine Messwertänderungen als Knick ausgewertet werden.

Steilheit

0.0 ... [0.9] ... 10.0

Minimale Differenz zwischen der Steilheit vor und nach dem Knickpunkt. Je kleiner die Differenz, desto mehr Knickpunkte werden gefunden.

Glättungsfaktor

2 ... [5] ... 20

Je höher der Glättungsfaktor, desto weniger Endpunkte werden gefunden.

Fenster

Messwert, Zeit, [aus]

Auf der Messwertachse oder auf der Zeitachse kann ein Bereich (Fenster) definiert werden. Die Knickpunkt-Auswertung erfolgt nur im vorgegebenen Fenster. Es wird jeweils nur der erste Knickpunkt anerkannt, der innerhalb des gesetzten Fensters liegt.

Untere Grenze

[-200.0] ... 200.0 μA (für Fenster = Messwert)

[0] ... 999'999 s (für Fenster = Zeit)

Messwert für die untere Grenze des Fensters.

Obere Grenze

-200.0 ... [200.0] μA (für Fenster = Messwert)

0 ... [999'999] s (für Fenster = Zeit)

Messwert für die obere Grenze des Fensters.

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: siehe *DET pH - Weitere Messwerte*

MEAS T

Befehl für **Temperatur-Messungen**.

Geräte


Dieser Befehl kann mit dem folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **MEAS T** verfügen:

Titrimo: 702, 716, 718, 719, 720, 721, 736, 751, 758, 785, 794, 798, 799

Titrando: 808, 809, 835, 836, 841

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

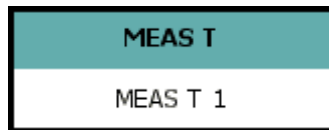

Parameter

Die Parameter für den Befehl **MEAS T** werden auf den folgenden 4 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Sensor und Rührer.
- **Messparameter**
Parameter zur Einstellung des Messvorgangs.
- **Auswertungen**
Definieren von weiteren Methoden zur Auswertung der Messkurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten, die als zusätzliche Kolonnen in der Messpunktliste gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

The dialog box 'MEAS T - MEAS T 6' has a 'Befehlsname' field set to 'MEAS T 6'. Below it are three tabs: 'Messparameter', 'Auswertungen', and 'Weitere Messwerte'. The 'Allgemein/Hardware' tab is selected and contains the following settings:

- Gerät:**
 - Gerätename: nicht definiert
 - Gerätetyp: Titrando
- Sensor:**
 - Messeingang: 1
 - Sensor: Temperature sensor
- Rührer:**
 - Rührer: 1
 - Rührgeschwindigkeit: 8
- ☒ Automatisch ausschalten

Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' are at the bottom right.

Befehlsname

25 Zeichen, [MEAS T #]

Name des Befehls.

Hier werden die allgemeinen Parameter zum Gerät, Sensor und Rührer eingestellt.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [Titrando]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Sensor

Messeingang

[1] ... 2 (Titrando)

[1] ... 2, **diff.** (Titrino)

Auswahl des Messeinganges, an dem der Sensor angeschlossen ist.

Sensor

Sensorname, [Temperature sensor], pH electrode

Auswahl eines Temperatursensors oder einer pH-Elektrode aus den in der Sensortabelle vorhandenen Sensoren.

Rührer

Rührer

[1] ... 4, **aus** (nur Titrando)

Auswahl des Rührers. **aus** bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.

Rührgeschwindigkeit

-15 ... [8] ... 15 (nur Titrando)

Einstellen der Rührgeschwindigkeit. Mit dem Vorzeichen der Rührgeschwindigkeit ändert sich die Richtung, in der gerührt wird.

Automatisch ausschalten

[ein], **aus** (nur Titrando)

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Messparameter

Befehlsname

25 Zeichen, [MEAS T #]

Name des Befehls.

Auf dieser Registerkarte können die Parameter für den Messvorgang eingestellt werden.

Messung

Zur Auswahl stehen die zwei Messarten **Messung mit Driftkontrolle** oder **Messung ohne Driftkontrolle**.

Hinweis

Ein konstanter Messwert wird oft erst nach einer gewissen Zeit erreicht, da die Durchmischung und eventuell die Reaktion selbst eine bestimmte Zeit benötigen. Ausserdem kann sich die Ansprechzeit einer Elektrode mit der Zeit erhöhen, d.h. das Erreichen eines konstanten Messwertes dauert immer länger. Besonders in diesem Fall ist eine **driftkontrollierte Messung** sinnvoll, da die Messwerte erst übernommen werden, wenn der Gleichgewichtszustand nahezu erreicht ist.

Messung mit Driftkontrolle

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, so wird driftkontrolliert gemessen. Die Messung wird abgebrochen, sobald die definierte **Messwertdrift** oder der **Stoppmesswert** erreicht ist oder eine definierte **Wartezeit** abgelaufen ist. Ist diese Option nicht angewählt, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.

Messwertdrift

0.1 ... [0.5] ... 999.9 °C/min (Titrande)

[0.5] ... 999 °C/min (Titrino)

Der Messwert wird erst übernommen, wenn die hier definierte Messwertdrift unterschritten ist.

Min. Wartezeit

[0] ... 999'999 s (nur Titrande)

Die Messwertübernahme erfolgt erst nach Ablauf der minimalen Wartezeit, auch wenn die Messwertdrift schon erreicht ist. Während des Ablaufs der minimalen Wartezeit wird die Drift weiterhin kontrolliert.

Max. Wartezeit

0 ... [52] ... 999'999 s (Titrande)

0 ... [52] ... 9'999 s (Titrino)

Wenn die Messwertdrift noch nicht erreicht ist, erfolgt die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit. Falls die Wartezeit nicht neu eingegeben wurde, wird automatisch eine zur Drift passende Wartezeit nach folgender Formel berechnet:

$$\text{Wartezeit} = 150 / \sqrt{\text{Drift} + 0.01} + 5$$

Messintervall

0.1 ... [2.0] ... 999'999.0 s (Titrande, Schrittweite 0.1 s)

0.08 ... [2.0] ... 16'200 s (Titrino, Schrittweite 0.08 s)

Zeitintervall für den Eintrag eines Messpunktes in die Messpunktliste.

Stoppmesswert

-20.0 .. 150.0 °C, [aus] (nur Titrande)

Abbruch, wenn seit dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird. **aus** bedeutet kein Abbruch.

Messung ohne Driftkontrolle

[ein], aus

Wird diese Option eingeschaltet, so wird ohne Driftkontrolle gemessen.

Gemessen wird solange, bis eines der beiden Abbruchkriterien **Messdauer** oder **Stoppmesswert** erfüllt ist. Ist diese Option ausgeschaltet, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.

Messdauer

0 ... [120] ... 999'999 s

Maximale Zeit, während der gemessen wird.

Messintervall

0.1 ... [2.0] ... 999'999.0 s (Titrande, Schrittweite 0.1 s)

0.08 ... [2.0] ... 16'200 s (Titrino, Schrittweite 0.08 s)

Zeitintervall für den Eintrag eines Messpunktes in die Messpunktliste.

Stoppmesswert

-20.0 ... 150.0 °C, [aus] (nur Titrande)

Abbruch, wenn seit dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird. **aus** bedeutet kein Abbruch.

Auswertungen

Befehlsname
25 Zeichen, [MEAS T #]
Name des Befehls.

Hier können die folgenden zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Messkurven eingeschaltet und definiert werden.

Fix-Endpunkt-Auswertung

ein, [aus]

Zu einer fixen Grösse (Messwert oder Zeit) werden für den Fix-Endpunkt aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert.

Fixe Messgrösse
[Messwert], Zeit

Auswahl der fixen Messgrösse, zu der aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert werden.

Fix-EP# bei
-20.0 ... 150.0 °C, [aus]
Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgrösse** = **Messwert**.

Fix-EP# bei
0.0 ... 999'999.9 s, [aus]
Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgrösse** = **Zeit**.

9 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden zusätzlich zu den immer vorhandenen Fix-EP1...3 auch die Fix-EP4...9 angezeigt.

3 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden anstelle der Fix-EP1...9 nur noch die Fix-EP1...3 angezeigt.

Minimum-Auswertung

ein, [aus]

Zum minimalen Messwert wird aus der Messpunktliste die zugehörige Zeit interpoliert) (siehe *Titrationsebefhle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.1 ... [1.0] ... 20.0 °C/s

Die Auswertung des Minimums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Maximum-Auswertung

ein, [aus]

Zum maximalen Messwert wird aus der Messpunktliste die zugehörige Zeit interpoliert) (siehe *Titrationsebefhle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.1 ... [1.0] ... 20.0 °C/s

Die Auswertung des Maximums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Knickpunkt-Auswertung

ein, [aus]

Mit der Knickpunkt-Auswertung werden scharfe Richtungsänderungen in der Messkurve bestimmt) (siehe *Titrationsebefhle - Auswertung - Knickpunkt-Auswertung*).

EP-Kriterium

0 ... [0.3] ... 1.0

Mass für die minimale Schärfe des Knicks. Je kleiner das EP-Kriterium gesetzt wird, desto mehr Knickpunkte werden gefunden. Da es sich um einen relativen Wert bezogen auf die Gesamtmesswertänderung handelt, können bei einem kleinen Messwertbereich schon kleine Messwertänderungen als Knick ausgewertet werden.

Steilheit

0.0 ... [0.9] ... 10.0

Minimale Differenz zwischen der Steilheit vor und nach dem Knickpunkt. Je kleiner die Differenz, desto mehr Knickpunkte werden gefunden.

Glättungsfaktor

2 ... [5] ... 20

Je höher der Glättungsfaktor, desto weniger Endpunkte werden gefunden.

Fenster

Messwert, Zeit, [aus]

Auf der Messwertachse oder auf der Zeitachse kann ein Bereich (Fenster) definiert werden. Die Knickpunkt-Auswertung erfolgt nur im vorgegebenen Fenster. Es wird jeweils nur der erste Knickpunkt anerkannt, der innerhalb des gesetzten Fensters liegt.

Untere Grenze

[-20.0] ... 150.0 °C (für Fenster = Messwert)

Messwert für die untere Grenze des Fensters.

[0] ... 999'999 s (für Fenster = Zeit)

Zeit für die untere Grenze des Fensters.

Obere Grenze

-20.0 ... [150.0] °C (für Fenster = Messwert)

Messwert für die obere Grenze des Fensters.

0 ... [999'999] s (für Fenster = Zeit)

Zeit für die obere Grenze des Fensters.

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Weitere Messwerte*

MEAS T/Flow


Befehl für **Temperatur- und Gasfluss-Messungen**.

Geräte

Dieser Befehl kann nur mit dem 774 Oven Sample Processor ausgeführt werden.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

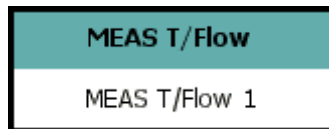


Parameter

Die Parameter für den Befehl **MEAS T/Flow** werden auf den folgenden 4 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Sensor und Rührer.
- **Messparameter**
Parameter zur Einstellung des Messvorgangs.
- **Auswertungen**
Definieren von weiteren Methoden zur Auswertung der Messkurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten, die als zusätzliche Kolonnen in der Messpunktliste gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

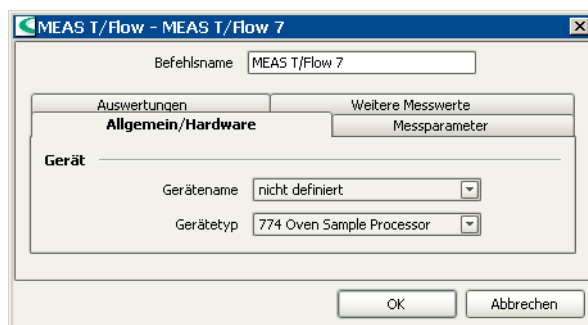

Befehlsname

25 Zeichen, [MEAS T/Flow #]

Name des Befehls.

Hier werden die allgemeinen Parameter zum Gerät eingestellt.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines 774 Oven Sample Processors aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In

diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

774 Oven Sample Processor

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Messparameter

The screenshot shows a dialog box titled "MEAS T/Flow - MEAS T/Flow 7". At the top, there is a text field for "Befehlsname" containing "MEAS T/Flow 7". Below this, there are two tabs: "Auswertungen" and "Messparameter". The "Messparameter" tab is active. Inside this tab, there are three input fields: "Messdauer" with a value of "600 s", "Messintervall" with a value of "10 s", and "Stoppmesswert Temp." with a dropdown menu set to "aus" and a unit of "°C". At the bottom right, there are "OK" and "Abbrechen" buttons.

Befehlsname

25 Zeichen, [MEAS T/Flow #]

Name des Befehls.

Auf dieser Registerkarte können die Parameter für den Messvorgang eingestellt werden.

Messdauer

0 ... [600] ... 999'999 s

Maximale Zeit, während der gemessen wird.

Messintervall

1 ... [10] ... 999'999.0 s

Zeitintervall für den Eintrag eines Messpunktes in die Messpunktliste.

Stoppmesswert Temp.

-20.0 ... 150.0 °C, [aus]

Abbruch, wenn seit dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird. **aus** bedeutet kein Abbruch.

Auswertungen

The screenshot shows the same dialog box as before, but with the "Auswertungen" tab active. The "Messparameter" tab is now inactive. Inside the "Auswertungen" tab, there are two checked checkboxes: "Minimum-Auswertung Temperatur" and "Maximum-Auswertung Temperatur". Each checkbox has a corresponding "Schwellenwert" input field with a value of "1.0" and a unit of "°C/s". At the bottom right, there are "OK" and "Abbrechen" buttons.

Befehlsname

25 Zeichen, [MEAS T/Flow #]

Name des Befehls.

Hier können die folgenden zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Messkurven eingeschaltet und definiert werden.

Minimum-Auswertung Temperatur

ein, [aus]

Zum minimalen Messwert wird aus der Messpunktliste die zugehörige Zeit interpoliert (*siehe Titrationsbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.1 ... [1.0] ... 20.0 °C/s

Die Auswertung des Minimums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Maximum-Auswertung Temperatur

ein, [aus]

Zum maximalen Messwert wird aus der Messpunktliste die zugehörige Zeit interpoliert (*siehe Titrationsbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.1 ... [1.0] ... 2 0.0 °C/s

Die Auswertung des Maximums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Weitere Messwerte*

MEAS Conc

Befehl für **Konzentrationsmessungen** (Direktmessung).

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, welche über den Modus **MEAS Conc** verfügen:

Titrand: 808, 809, 835, 836

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **MEAS Conc** werden auf den folgenden 3 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Sensor und Rührer.

- **Messparameter**
Parameter zur Einstellung des Messvorgangs.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten, die als zusätzliche Kolonnen in der Messpunktliste gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

Befehlsname
25 Zeichen, [MEAS Conc #]
Name des Befehls.

Hier werden die allgemeinen Parameter zum Gerät, Sensor und Rührer eingestellt.

Gerät

Gerätename
Gerätename, [nicht definiert]
Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp
Gerätetypen, [Titrande]
Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.
Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Sensor

Messeingang
[1] ... 2
Auswahl des Messeinganges, an dem der Sensor angeschlossen ist.

Sensor
Sensorname, [ISE electrode (Fluorid)]
Auswahl eines ISE-Sensors aus den in der Sensortabelle vorhandenen ISE-Sensoren.

Temperaturmessung

Art der Temperaturmessung:

kontinuierlich

Es muss ein Temperaturfühler angeschlossen sein. Die Temperatur wird dann laufend gemessen.

[automatisch]

Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist, wird die Temperatur laufend gemessen. Ansonsten wird die unter **Temperatur** (siehe **Messparameter**) manuell eingetragene Temperatur verwendet.

aus

Die Temperatur wird nicht gemessen. Die unter **Temperatur** (siehe **Messparameter**) manuell eingetragene Temperatur wird verwendet.

Rührer

Rührer

[1] ... 4, aus

Auswahl des Rührers. **aus** bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.

Rührgeschwindigkeit

-15 ... [8] ... 15

Einstellen der Rührgeschwindigkeit. Mit dem Vorzeichen der Rührgeschwindigkeit ändert sich die Richtung, in der gerührt wird.

Automatisch ausschalten

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Messparameter

Abbildung und Parameter: *siehe MEAS U - Messparameter*

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Weitere Messwerte*

MEAS Cond

Befehl für **Leitfähigkeits-Messungen**.

Geräte

Dieser Befehl kann nur mit dem 712 Konduktometer ausgeführt werden.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **MEAS Cond** werden auf den folgenden 4 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Sensor und Rührer.

- **Messparameter**
Parameter zur Einstellung des Messvorgangs.
- **Auswertungen**
Definieren von weiteren Methoden zur Auswertung der Messkurven.
- **Weitere Messwerte**
Definition von weiteren Messwerten, die als zusätzliche Kolonnen in der Messpunktliste gespeichert werden.

Allgemein/Hardware

Befehlsname
25 Zeichen, [MEAS Cond #]
Name des Befehls.

Hier werden die allgemeinen Parameter zum Gerät und Sensor eingestellt.

Gerät

Gerätename
Gerätename, [nicht definiert]
Auswahl eines 712 Konduktometers aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp
712 Konduktometer
Anzeige des Gerätetyps.

Sensor

Sensor
Sensorname, [Conductivity sensor]
Auswahl eines Leitfähigkeits-Sensors aus den in der Sensortabelle vorhandenen Leitfähigkeits-Sensoren.

Messparameter

Befehlsname

25 Zeichen, [MEAS Cond #]

Name des Befehls.

Auf dieser Registerkarte können die Parameter für den Messvorgang eingestellt werden.

Messung

Messfrequenz

[auto], 300 Hz, 2.4 kHz

Mit **auto** wird automatisch die am besten geeignete der beiden Frequenzen gewählt.

Messdauer

0 ... [120] ... 999'999 s

Maximale Zeit, während der gemessen wird.

Messintervall

0.4 ... [2.0] ... 999'998 s

Zeitintervall für den Eintrag eines Messpunktes in die Messpunktliste.

Stoppmesswert

0.0000 ... 2'000.0 mS/cm, [aus]

Abbruch, wenn seit dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird. **aus** bedeutet kein Abbruch.

Temperatur

Referenztemperatur

-170.0 ... [20.0] ... 500.0 °C

Die elektrische Leitfähigkeit ist sehr stark von der Temperatur abhängig. Die bei einer beliebigen Temperatur gemessene Leitfähigkeit wird automatisch auf die Leitfähigkeit dieser Referenztemperatur (üblicherweise 20 °C oder 25 °C) umgerechnet.

Messtemperatur

-170.0 ... [20.0] ... 500.0 °C

Temperatur der Messlösung. Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist, wird die hier eingegebene Temperatur ignoriert.

Auswertungen

MEAS Cond - MEAS Cond 9

Befehlsname: MEAS Cond 9

Algemein/Hardware

Messparameter **Auswertungen** Weitere Messwerte

☒ Fix-Endpunkt-Auswertung

Fixe Messgröße: Messwert

Fix-EP1 bei: aus mS/cm

Fix-EP2 bei: aus mS/cm

Fix-EP3 bei: aus mS/cm 9 Fix-EPs

☒ Minimum-Auswertung

Schwellenwert: 5.0 (mS/cm)/s

☒ Maximum-Auswertung

Schwellenwert: 5.0 (mS/cm)/s

☒ Knickpunkt-Auswertung

EP-Kriterium: 0.3

Steilheit: 0.9

Glättungsfaktor: 5

Fenster: aus

OK Abbrechen

Befehlsname

25 Zeichen, [MEAS Cond #]

Name des Befehls.

Hier können die folgenden zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Messkurven eingeschaltet und definiert werden.

Fix-Endpunkt-Auswertung

ein, [aus]

Zu einer fixen Größe (Messwert oder Zeit) werden für den Fix-Endpunkt aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Größen interpoliert.

Fixe Messgröße

[Messwert], Zeit

Auswahl der fixen Messgröße, zu der aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Größen interpoliert werden.

Fix-EP# bei

0.0000 ... 2'000.0 mS/cm, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgröße** = **Messwert**.

Fix-EP# bei

0.0 ... 999'999.9 s, [aus]

Fix-Endpunkt 1 ... 9 für **Fixe Messgröße** = **Zeit**.

9 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden zusätzlich zu den immer vorhandenen Fix-EP1...3 auch die Fix-EP4...9 angezeigt.

3 Fix-EPs

Mit dieser Schaltfläche werden anstelle der Fix-EP1...9 nur noch die Fix-EP1...3 angezeigt.

Minimum-Auswertung

ein, [aus]

Zum minimalen Messwert werden aus der Messpunktliste die zugehörige Zeit und die Temperatur interpoliert) (siehe *Titrationbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.5 ... [5.0] ... 10.0 (mS/cm)/s

Die Auswertung des Minimums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Maximum-Auswertung

ein, [aus]

Zum maximalen Messwert werden aus der Messpunktliste die zugehörige Zeit und die Temperatur interpoliert) (siehe *Titrationbefehle - Auswertung - Minimum/Maximum-Auswertung*).

Schwellenwert

0.5 ... [5.0] ... 10.0 (mS/cm)/s

Die Auswertung des Maximums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Knickpunkt-Auswertung

ein, [aus]

Mit der Knickpunkt-Auswertung werden scharfe Richtungsänderungen in der Messkurve bestimmt) (siehe *Titrationbefehle - Auswertung - Knickpunkt-Auswertung*).

EP-Kriterium

0 ... [0.3] ... 1.0

Mass für die minimale Schärfe des Knicks. Je kleiner das EP-Kriterium gesetzt wird, desto mehr Knickpunkte werden gefunden. Da es sich um einen relativen Wert bezogen auf die Gesamtmesswertänderung handelt, können bei einem kleinen Messwertbereich schon kleine Messwertänderungen als Knick ausgewertet werden.

Steilheit

0.0 ... [0.9] ... 10.0

Minimale Differenz zwischen der Steilheit vor und nach dem Knickpunkt. Je kleiner die Differenz, desto mehr Knickpunkte werden gefunden.

Glättungsfaktor

2 ... [5] ... 20

Je höher der Glättungsfaktor, desto weniger Endpunkte werden gefunden.

Fenster

Messwert, Zeit, [aus]

Auf der Messwertachse oder auf der Zeitachse kann ein Bereich (Fenster) definiert werden. Die Knickpunkt-Auswertung erfolgt nur im vorgegebenen Fenster. Es wird jeweils nur der erste Knickpunkt anerkannt, der innerhalb des gesetzten Fensters liegt.

Untere Grenze

[0.0000] ... 2'000.0 mS/cm (für Fenster = Messwert)

Messwert für die untere Grenze des Fensters.

[0] ... 999'999 s (für Fenster = Zeit)

Zeit für die untere Grenze des Fensters.

Obere Grenze

0.0000 ... [2'000.0] mS/cm (für Fenster = Messwert)

Messwert für die obere Grenze des Fensters.

0 ... [999'999] s (für Fenster = Zeit)

Zeit für die obere Grenze des Fensters.

Weitere Messwerte

Abbildung und Parameter: *siehe DET pH - Weitere Messwerte*


5.6.7 Kalibrierbefehle

Befehle für die **Kalibrierung** von pH- und ionenselektiven Elektroden.

Allgemeines

Für die Kalibrierung von Elektroden stehen die beiden Befehle **CAL LOOP** und **CAL MEAS** zur Verfügung. Im Schleifenbefehl **CAL LOOP** wird die Anzahl und Art der Puffer bzw. Standards definiert, die anschliessend mit dem Befehl **CAL MEAS** gemessen werden sollen. Nach jedem Schleifendurchgang wird die Gültigkeit der Messung überprüft und am Schluss werden die Kalibrierdaten für die Elektrode berechnet.

Das Grundgerüst einer Kalibriermethode sieht wie folgt aus:

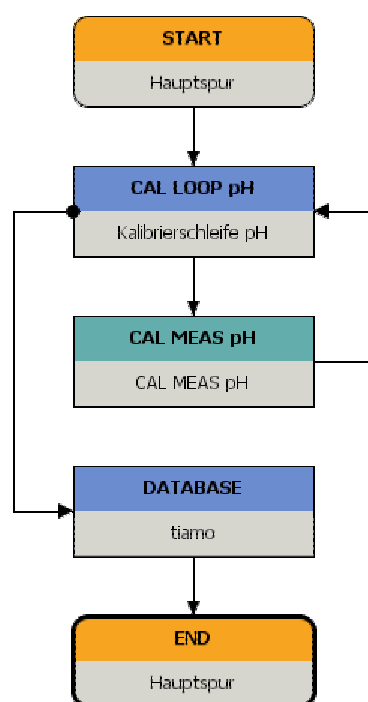

Die Kalibrierung kann sowohl mit manuellem Lösungswechsel als auch mit automatischem Lösungswechsel mit Hilfe eines Probenwechslers ausgeführt werden.


Befehle

Für Kalibrierungen stehen die folgenden Befehle zur Verfügung:

- **CAL LOOP pH**
Kalibrierschleife für die Kalibrierung von pH-Elektroden.
- **CAL MEAS pH**
Messbefehl für die Kalibrierung von pH-Elektroden.
- **CAL LOOP Conc**
Kalibrierschleife für die Kalibrierung von ionenselektiven Elektroden (ISE-Elektroden).
- **CAL MEAS Conc**
Messbefehl für die Kalibrierung von ionenselektiven Elektroden (ISE-Elektroden).

Kalibrieren mit manuellem Lösungswechsel


Das Grundgerüst für eine Kalibriermethode mit manuellem Lösungswechsel sieht wie folgt aus:

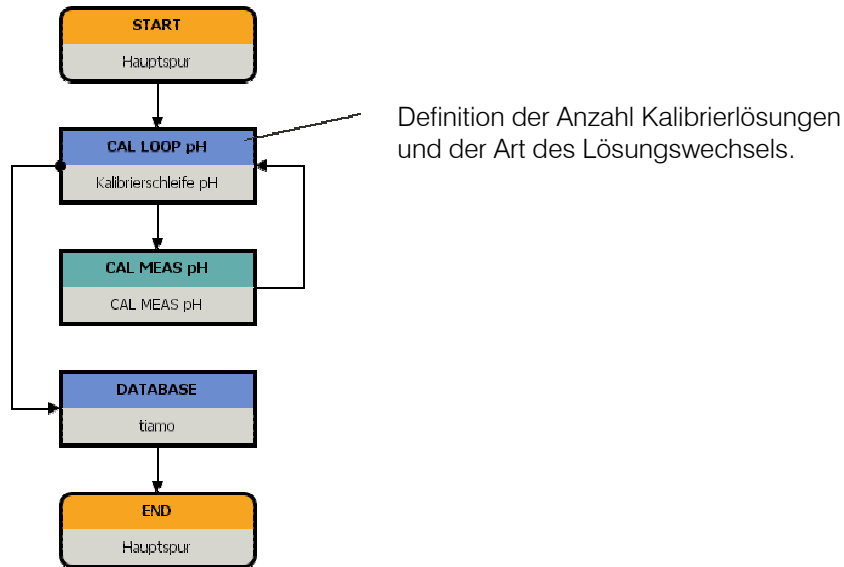

Im Befehl **CAL LOOP pH** bzw. **CAL LOOP Conc** muss die Aufforderung zum Pufferwechsel bzw. Standardwechsel **eingeschaltet** sein. Im Ablauf erscheint dann nach jeder Messung die Aufforderung, den nächsten Puffer bzw. Standard vorzulegen.

Kalibrieren mit automatischem Lösungswechsel

Das Grundgerüst für eine Kalibriermethode mit automatischem Lösungswechsel auf einem Probenwechsler sieht wie folgt aus:

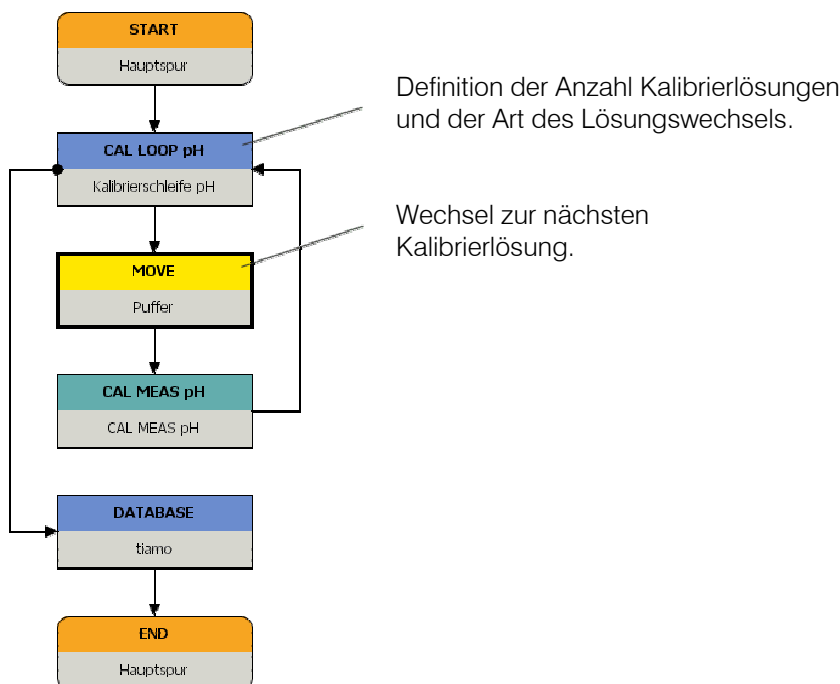

Im Befehl **CAL LOOP pH** bzw. **CAL LOOP Conc** muss die Aufforderung zum Pufferwechsel bzw. Standardwechsel **ausgeschaltet** sein. Im Ablauf erscheint dann keine Aufforderung zum Lösungswechsel.

Für den automatischen Wechsel zur nächsten Kalibrierlösung auf dem Probenwechserrack muss ein **MOVE**-Befehl zwischen dem Schleifenbefehl **CAL LOOP** und dem Messbefehl **CAL MEAS** eingefügt werden. In diesem Befehl werden die Positionen der Kalibrierlösungen auf dem Rack definiert. Dafür gibt es die folgenden 3 Möglichkeiten:

- Rackpositionen für Kalibrierlösungen in der Methode definieren**
 Ausgehend von einer im **MOVE**-Befehl definierten ersten Rackposition **###** für die erste Kalibrierlösung werden die weiteren Kalibrierlösungen der Reihe nach an den darauf folgenden Positionen verwendet. Dafür müssen im Befehl **MOVE** unter **Ziel** die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:
Drehen: Rackposition
Nummer: = **### - 1 + 'Befehlsname.LCO'** (Eingabe via Formeleditor, z. B. = **19 + 'Kalibrierschleife pH.LCO'** für das obige Methodenbeispiel mit der ersten Kalibrierlösung auf Position **20**).
- Spezialbecher für Kalibrierlösungen in der Methode definieren**
 Ausgehend von einem im **MOVE**-Befehl definierten ersten Spezialbecher **###** für die erste Kalibrierlösung werden die weiteren Kalibrierlösungen der Reihe nach an den darauf folgenden Spezialbecherpositionen verwendet. Dabei müssen für das aufgelegte Rack so viele Spezialbecher definiert sein, wie Kalibrierpuffer verwendet werden (siehe Eigenschaften Rack - Spezialbecher). Im Befehl **MOVE** müssen unter **Ziel** die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:
Drehen: Spezialbecher
Nummer: = **### + 'Befehlsname.LCO'** (Eingabe via Formeleditor, z. B. =

5 + 'Kalibrierschleife pH.LCO' für das obige Methodenbeispiel mit der ersten Kalibrierlösung auf Spezialbecher-Position **6**).

- **Rackpositionen für Kalibrierlösungen in den Probedaten definieren**

Ausgehend von der in den Probedaten definierten **Probenposition** (Variable '**MV.Probenposition**') für die erste Kalibrierlösung werden die weiteren Kalibrierlösungen der Reihe nach an den darauf folgenden Rackpositionen verwendet. Dafür müssen im Befehl **MOVE** unter **Ziel** die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

Drehen: Rackposition

Nummer: = '**MV.Probenposition**' - 1 + '**Befehlsname.LCO**' (Eingabe via Formeleditor, z. B. = '**MV.Probenposition**' - 1 + '**Kalibrierschleife pH.LCO**' für das obige Methodenbeispiel).

Bei allen drei Möglichkeiten wird die Variable '**Befehlsname.LCO**' (Indexnummer der Kalibrierschleife) bei jedem Schleifendurchlauf um **+1** erhöht.

Hinweis

Der Formeleditor wird mit einem Klick mit der rechten Maustaste in das Eingabefeld geöffnet.

CAL LOOP pH

Schleifenbefehl für die **Kalibrierung von pH-Elektroden**, der zusammen mit dem Befehl **CAL MEAS pH** verwendet wird.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:




Parameter

Die Parameter für den Befehl **CAL LOOP pH** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **CAL LOOP pH**

CAL LOOP pH - Eigenschaften

Im Dialogfenster **CAL LOOP pH** wird die Anzahl Puffer sowie der Puffertyp definiert.

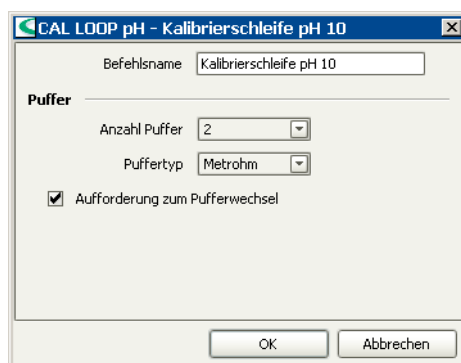

Befehlsname
25 Zeichen, [Kalibrierschleife pH #]
 Name des Befehls.

Puffer

Anzahl Puffer
1 ... [2] ... 5
 Auswahl der Anzahl Puffer, mit denen die pH-Kalibrierung durchgeführt werden soll.

Puffertyp
 Auswahl einer vordefinierten Pufferreihe für die pH-Kalibrierung.
[Metrohm], NIST, DIN, Fisher, Fluka Basel, Mettler, Merck, Beckman, Radiometer
 Bei Verwendung dieser Puffer erkennt *tiamo* automatisch, um welchen Puffer es sich handelt.

Eigene
 Mit **Eigene** wird die in der Konfiguration unter **Extras, Vorlagen, Eigene Kalibrierpuffer** definierte eigene Pufferreihe verwendet.

Spezial
 Mit **Spezial** können direkt im Eigenschaftsfenster des Befehls **CAL LOOP pH** bis zu 5 Kalibrierpuffer definiert werden.

Hinweis

Für Puffertyp **Spezial** ist die automatische Puffererkennung nicht aktiv und die Puffer müssen bei der Kalibrierung in der Reihenfolge gemessen werden, wie sie im Befehl **CAL LOOP pH** definiert wurden.

Puffer # pH
-20.000 ... 20.000
 pH-Wert der Spezial-Puffer (wird nur für **Puffertyp = Spezial** angezeigt).

Hinweis

Geben Sie die pH-Werte für die verwendete Kalibriertemperatur ein. Im Ablauf wird entsprechend oft eine Meldung angezeigt, welcher Puffer als nächstes gemessen werden muss.

Aufforderung zum Pufferwechsel

[ein], aus

Wird diese Option eingeschaltet, so erscheint nach jedem Durchlauf der Kalibrierschleife die Aufforderung zum manuellen Pufferwechsel. Für den automatischen Pufferwechsel bei der Kalibrierung mit einem Probenwechsler muss dieser Parameter ausgeschaltet sein.

CAL MEAS pH

Messbefehl für die **Kalibrierung mit pH-Elektroden**, der zusammen mit dem Befehl **CAL LOOP pH** verwendet wird.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Titrimo: 702, 716, 718, 719, 720, 721, 736, 751, 758, 785, 794, 798, 799

Titrand: 808, 809, 835, 836, 841

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **CAL MEAS pH** werden auf den folgenden 2 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Sensor und Rührer.
- **Messparameter**
Parameter zur Einstellung des Messvorganges.

Allgemein/Hardware

CAL MEAS pH - CAL MEAS pH 11

Befehlsname: CAL MEAS pH 11

Allgemein/Hardware | Messparameter

Gerät

Gerätename: nicht definiert

Gerätetyp: Titrand

Sensor

Messeingang: 1

Sensor: pH electrode

Temperaturmessung: automatisch

Rührer

Rührer: 1

Rührgeschwindigkeit: 8

☒ Automatisch ausschalten

OK Abbrechen

Befehlsname

25 Zeichen, [CAL MEAS pH #]

Name des Befehls.

Auf dieser Registerkarte werden die allgemeinen Parameter zum Gerät, Sensor und Rührer eingestellt.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [Titrando]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Sensor

Messeingang

[1] ... 2 (Titrando)

[1] ... 2, diff. (Titrino)

Auswahl des Messeinganges, an dem der Sensor angeschlossen ist.

Sensor

Sensorname, [pH electrode]

Auswahl eines pH-Sensors aus den in der Sensortabelle vorhandenen pH-Sensoren.

Temperaturmessung

Art der Temperaturmessung (nur Titrando):

kontinuierlich

Es muss ein Temperaturfühler angeschlossen sein. Die Temperatur wird dann laufend gemessen.

[automatisch]

Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist, wird die Temperatur laufend gemessen. Ansonsten wird die unter **Temperatur** (siehe **Messparameter**) manuell eingetragene Temperatur verwendet.

aus

Die Temperatur wird nicht gemessen. Die unter **Temperatur** (siehe **Messparameter**) manuell eingetragene Temperatur wird verwendet.

Rührer

Rührer

[1] ... 4, aus (nur Titrando)

Auswahl des Rührers. **aus** bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.

Rührgeschwindigkeit

-15 ... [8] ... 15 (nur Titrando)

Einstellen der Rührgeschwindigkeit. Mit dem Vorzeichen der Rührgeschwindigkeit ändert sich die Richtung, in der gerührt wird.

Automatisch ausschalten

[ein], aus (nur Titrando)

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Messparameter

Befehlsname

25 Zeichen, [CAL MEAS pH #]

Name des Befehls.

Auf dieser Registerkarte werden die Messparameter für die Kalibrierung eingestellt.

Messung mit Driftkontrolle

Die pH-Kalibrierung erfolgt driftkontrolliert. Die Messung wird abgebrochen, sobald die definierte **Messwertdrift** erreicht ist oder eine definierte **Wartezeit** abgelaufen ist.

Messwertdrift

0.1 ... [10.0] ... 999.0 mV/min (Titrande)

0.5 ... [10] ... 999 mV/min (Titrino)

Der Messwert wird erst übernommen, wenn die hier definierte Messwertdrift unterschritten ist.

Min. Wartezeit

0 ... [10]...999'999 s (nur Titrande)

Die Messwertübernahme erfolgt erst nach Ablauf der minimalen Wartezeit, auch wenn die Messwertdrift schon erreicht ist. Während des Ablaufs der minimalen Wartezeit wird die Drift weiterhin kontrolliert.

Max. Wartezeit

0 ... [110] ... 999'999 s (Titrande)

0 ... [110] ... 9'999 s (Titrino)

Wenn die Messwertdrift noch nicht erreicht ist, erfolgt die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit. Falls die Wartezeit nicht neu eingegeben wurde, wird automatisch eine zur Drift passende Wartezeit nach folgender Formel berechnet:

$$\text{Wartezeit} = 150 / \sqrt{\text{Drift} + 0.01} + 5$$

Messintervall

0.1 ... [2.0] ... 999'999.0 s (Titrande, Schrittweite 0.1 s)

0.08 ... [2.0] ... 16'200 s (Titrino, Schrittweite 0.08 s)

Zeitintervall für den Eintrag eines Messpunktes in die Messpunktliste.

Temperatur

Temperatur

-20.0 ... [25.0] ... 150 °C

Die Temperatur, bei welcher kalibriert wird, kann manuell eingegeben werden. Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist und die **Temperaturmessung** in der Registerkarte Allgemein/Hardware unter **Sensor** auf **automatisch** oder **kontinuierlich** eingestellt ist, wird die Temperatur laufend gemes-

sen. Der Wert wird für die Temperaturkorrektur bei der pH-Messung verwendet.

CAL LOOP Conc

Schleifenbefehl für die **Kalibrierung von ionselektiven Elektroden**, der zusammen mit dem Befehl **CAL MEAS Conc** verwendet wird.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:




Parameter

Die Parameter für den Befehl **CAL LOOP Conc** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **CAL LOOP Conc**

CAL LOOP Conc - Eigenschaften

Im Dialogfenster **CAL LOOP Conc** wird die Anzahl Standards sowie deren Konzentration definiert.

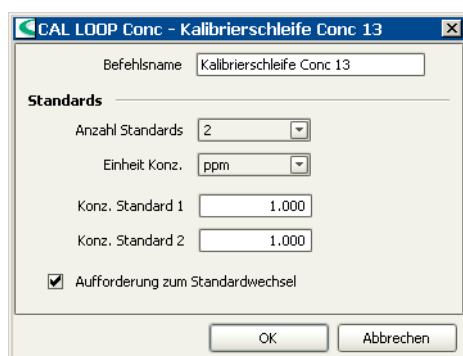

Befehlsname

25 Zeichen, [Kalibrierschleife Conc #]
Name des Befehls.

Standards

Anzahl Standards

1 ... [2] ... 5

Auswahl der Anzahl Standards, mit denen die Konzentrations-Kalibrierung durchgeführt werden soll.

Einheit Konz.

mol/L, mmol/L, [ppm], %, g/L, mg/L, mg/mL, µg/L

Auswahl der Konzentrationseinheit für die Standards.

Konz. Standard

0.001 ... 999'999.999

Geben Sie für jeden verwendeten Standard die entsprechende Konzentration ein.

Aufforderung zum Standardwechsel

[ein], aus

Wird diese Option eingeschaltet, so erscheint nach jedem Durchlauf der Kalibrierschleife die Aufforderung zum manuellen Lösungswechsel. Für den automatischen Lösungswechsel bei der Kalibrierung mit einem Probenwechsler muss dieser Parameter ausgeschaltet sein.

CAL MEAS Conc

Messbefehl für die **Kalibrierung mit ISE-Elektroden**, der zusammen mit dem Befehl **CAL LOOP Conc** verwendet wird.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Titrande: 808, 809, 835, 836

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **CAL MEAS Conc** werden auf den folgenden 2 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Sensor und Rührer.
- **Messparameter**
Parameter zur Einstellung des Messvorganges.

Allgemein/Hardware

Befehlsname

25 Zeichen, [CAL MEAS Conc #]

Name des Befehls.

Auf dieser Registerkarte werden die allgemeinen Parameter zum Gerät, Sensor und Rührer eingestellt.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [Titrando]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Sensor

Messeingang

[1] ... 2

Auswahl des Messeinganges, an dem der Sensor angeschlossen ist.

Sensor

Sensorname, [ISE electrode]

Auswahl eines ISE-Sensors aus den in der Sensortabelle vorhandenen ISE-Sensoren.

Temperaturmessung

Art der Temperaturmessung:

kontinuierlich

Es muss ein Temperaturfühler angeschlossen sein. Die Temperatur wird dann laufend gemessen.

[automatisch]

Wenn ein Temperatursensor angeschlossen ist, wird die Temperatur laufend gemessen. Ansonsten wird die unter **Temperatur** (siehe **Messparameter**) manuell eingetragene Temperatur verwendet.

aus

Die Temperatur wird nicht gemessen. Die unter **Temperatur** (siehe **Messparameter**) manuell eingetragene Temperatur wird verwendet.

Rührer

Rührer

[1] ... 4, aus

Auswahl des Rührers. **aus** bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.

Rührgeschwindigkeit

-15 ... [8] ... 15

Einstellen der Rührgeschwindigkeit. Mit dem Vorzeichen der Rührgeschwindigkeit ändert sich die Richtung, in der gerührt wird.

Automatisch ausschalten

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

Messparameter

Abbildung und Parameter: siehe CAL MEAS pH - Messparameter

5.6.8 Dosierbefehle

Befehle für **Dosieren** mit Dosier- und Wechseleinheiten.

Es können die folgenden vier Dosier-Befehle ausgewählt werden:

- **ADD**
Dosieren eines vordefinierten Volumens.
- **LQH**
Umfangreiche Dosiermöglichkeiten mit einem Dosino.
- **PREP**
Vorbereiten einer Wechsel- oder Dosiereinheit.
- **EMPTY**
Entleeren einer Dosiereinheit.

ADD

Befehl zur **Dosierung eines fixen Volumens** einer Lösung mit einer Wechsel- oder Dosiereinheit.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Titrimo: 716, 721, 736, 751, 758, 785, 794, 798, 799

Titrando: 808, 809, 835, 836, 841

Dosing Interface: 846

Probenwechsler: 730, 774, 778, 789, 814, 815

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **ADD** werden auf den folgenden 2 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät, Dosierer und Rührer.
- **Parameter**
Parameter zur Einstellung der Dosierung.

Allgemein/Hardware

Befehlsname
25 Zeichen, [Dosieren #]
Name des Befehls.

Hier werden die allgemeinen Parameter zum Gerät, Dosierer und Rührer eingestellt.

Gerät

Gerätename
Gerätename, [nicht definiert]
Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp
Gerätetypen, [Titrando]
Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.
Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Dosierer

Dosierer
[1] ... 4 (Titrando, 846)
[1] ... 3 (778, 789, 814, 815)
[1] ... 12 (730, 774)
intern D0 (716, 721, 785, 794, 798)
[intern D0], extern D1, extern D2 (736, 751, 758, 799)
Auswahl des Dosierers, mit dem die Dosierung durchgeführt werden soll. Es werden immer alle Dosierer-Anschlüsse angezeigt, welche für den gewählten Gerätetyp möglich sind.

Lösung
Titriermittel/Lösung, [nicht definiert]
Auswahl der in der Lösungstabelle aufgeführten Titriermittel und Lösungen.

Rührer

Rührer

[1] ... 4, **aus** (nur Titrande, 846, 814, 815)

Auswahl des Rührers. **aus** bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.

Rührgeschwindigkeit

-15 ... [8] ... 15 (nur Titrande, 846, 814, 815)

Einstellen der Rührgeschwindigkeit. Mit dem Vorzeichen der Rührgeschwindigkeit ändert sich die Richtung, in der gerührt wird.

Automatisch ausschalten

[ein], **aus** (nur Titrande, 846, 814, 815)

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Rührer am Ende der Dosierung automatisch ausgeschaltet.

Parameter

Befehlsname

25 Zeichen, [Dosieren #]

Name des Befehls.

Auf dieser Registerkarte wird das zu dosierende Volumen sowie die Dosier- und Füllgeschwindigkeit definiert.

Volumen

0.00000 ... [10.0000] ... 99999.9 mL

Fixvolumen, welches dosiert werden soll.

Dosiergeschwindigkeit

[maximal]

0.01 ... 166.00 mL/min (Titrande, 814 815)

0.01 ... 160.00 mL/min (730, 774, 778, 789)

0.01 ... 150.00 mL/min (Titrino)

Das Volumen wird mit dieser Geschwindigkeit dosiert. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab. Ist die eingegebene Dosiergeschwindigkeit für den gewählten Dosierer zu hoch, wird die Geschwindigkeit bei der Dosierung automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

Hinweis

Für viskose Flüssigkeiten sollte die Dosiergeschwindigkeit verringert werden.

Füllgeschwindigkeit

[maximal]

0.01 ... 166.00 mL/min (Titrande, 814 815)

0.01 ... 160.00 mL/min (730, 774, 778, 789)

0.01 ... 150.00 mL/min (Titrino)

Mit dieser Geschwindigkeit wird die Bürette nach der Dosierung gefüllt. Die maximale Füllgeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit oder Dosiereinheit ab. Ist die eingegebene Füllgeschwindigkeit für den gewählten Dosierer zu hoch, wird die Geschwindigkeit beim Füllen automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

Hinweis

Für viskose Flüssigkeiten sollte die Füllgeschwindigkeit verringert werden.

Automatisch füllen

Dieser Parameter ist nur für Geräte des Typs Titrando, Dosing Interface und USB Sample Processor sichtbar.

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird die Bürette nach dem Dosieren automatisch gefüllt. Während des Füllvorganges wird die Volumenanzeige zurück auf **0.0000 mL** gesetzt. Ist diese Option ausgeschaltet, so wird das zudosierte Volumen kumulativ angezeigt.

LQH

Befehl für **komplexe Dosieraufgaben** mit einem Dosierer des Typs Dosino (700 oder 800).

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, an die ein Dosino 700 oder 800 angeschlossen ist:

Titrando: 808, 809, 835, 836, 841

Dosing Interface: 846

Probenwechsler: 778, 789, 814, 815

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **LQH** werden auf den folgenden 2 Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein/Hardware**
Parameter für Gerät und Dosierer.
- **Parameter**
Parameter zur Einstellung der Liquid Handling-Funktion.

Allgemein/Hardware

Befehlsname

25 Zeichen, [Liquid Handling #]

Name des Befehls.

Hier werden die allgemeinen Parameter zum Gerät und zum Dosierer eingestellt.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [Titrande]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Dosierer

Dosierer

[1] ... 4 (Titrande, 846)

[1] ... 3 (778, 789, 814, 815)

Auswahl des Dosierers, mit dem der Liquid Handling-Befehl durchgeführt werden soll. Es werden immer alle Dosierer-Anschlüsse angezeigt, welche für den gewählten Gerätetyp möglich sind.

Lösung

Titriermittel/Lösung, [nicht definiert]

Auswahl der in der Lösungstabelle aufgeführten Titriermittel und Lösungen.

Parameter

Befehlsname

25 Zeichen, [Liquid Handling #]

Name des Befehls.

Hier wird die Liquid-Handling-Funktion definiert.

Funktion

Auswahl der Liquid-Handling-Funktion, die durchgeführt werden soll:

[Dosieren]

Das angegebene Volumen wird dosiert. Sowohl vorher als auch nachher findet kein automatisches Füllen statt.

Füllen

Das **Füllen** des Zylinders kann von einem frei gewählten Port erfolgen. Die Hahnscheibe bleibt anschliessend auf dem gewählten Port stehen.

Ansaugen

Mit dieser Funktion wird Flüssigkeit aus dem angegebenen Port angesaugt. Wie beim Dosieren wird der Zylinder auch hier weder vorher noch nachher automatisch gefüllt. Das anzusaugende Volumen sollte mit einem einzigen Kolbenhub erreichbar sein.

Ausstossen auf Anschlag

Mit der Funktion **Ausstossen auf Anschlag** wird der gesamte Zylinderinhalt über den angegebenen Port ausgestossen. Der Kolben wird dabei bis zum Anschlag, d. h. über die maximale Volumenmarke hinaus, niedergedrückt. Diese Funktion sollte nur zum Ausstossen von Luftblasen ausgeführt werden.

Ausstossen auf Endvolumen

Der gesamte Zylinderinhalt wird über den angegebenen Port ausgestossen. Der Kolben fährt im Gegensatz zur Funktion **Ausstossen auf Anschlag** bis zur maximalen Volumenmarke, d.h. bis er 10'000 Pulse ausgeführt hat. Dieser Befehl sollte für Pipettierabläufe zum Entleeren des Zylinders genutzt werden.

Wechselposition

Mit dieser Funktion kann der Zylinder vor dem Wechsel der Dosiereinheit gefüllt werden. So können Sie z. B. über **Port 4** Luft ansaugen. Die Hahnscheibe wird anschliessend auf **Port 2** gedreht und der Dosierantrieb kann von der Dosiereinheit abgenommen werden.

Port wechseln

Bei **Port wechseln** erfolgt nur eine Hahndrehung auf den angegebenen Port, aber keine Kolbenbewegung.

Kompensieren

Da die Dosiereinheiten auswechselbar sind, weist die Kupplung der Dosi-no-Schubstange (Spindel) eine geringe mechanische Toleranz auf, die sich bei der Änderung der Bewegungsrichtung des Kolbens bemerkbar macht. Diese Toleranz kann mit der Funktion **Kompensieren** ausgeglichen werden. Dabei wird zuerst eine kurze Kolbenbewegung in der gleichen Richtung wie der vorhergehenden Bewegung ausgeführt, gefolgt von einer Kolbenbewegung in der Gegenrichtung.

Port

1 ... 4


Defaultwerte:

1: für **Dosieren, Ansaugen**

2: für **Füllen, Wechselposition, Port wechseln**

4: für **Ausstossen auf Anschlag, Ausstossen auf Endvolumen, Kompensieren**

Für jeden Liquid Handling-Befehl muss der Port vorgegeben werden, auf dem die Funktion ausgeführt werden soll.

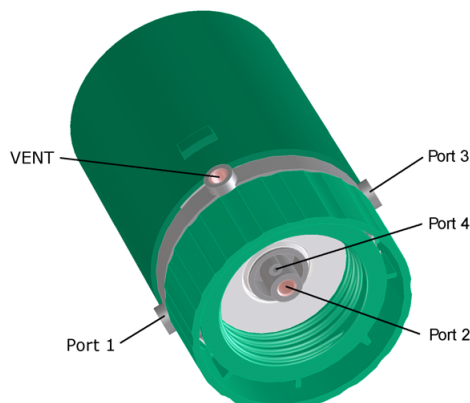

Volumen

0.00000 ... [10.00000] ... 99'999.9 mL (**Dosieren**)

0.00000 ... [10.00000] ... 50.0 mL (**Ansaugen**)

Geben Sie das zu bewegendes Volumen ein. Dieser Parameter steht nur für die **Funktion Dosieren** oder **Ansaugen** zur Verfügung.

Geschwindigkeit

[maximal]

0.01 ... 166.00 mL/min

Mit dieser Geschwindigkeit werden die Funktionen **Dosieren**, **Füllen**, **Ansaugen**, **Ausstossen** und **Wechselposition** durchgeführt. Die maximale Geschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit ab. Das **Ansaugen** und **Ausstossen** der Probe sollte mit einer Geschwindigkeit von < 10 mL/min erfolgen.

PREP

Befehl zum **Spülen von Zylinder und Schläuchen** einer Wechsel- oder Dosiereinheit.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Titrimo: 736, 751, 758, 799


Titrando: 808, 809, 835, 836, 841

Dosing Interface: 846

Probenwechsler: 730, 774, 778, 789, 814, 815

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

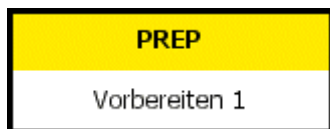


Parameter

Die Parameter für den Befehl **PREP** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **PREP**

PREP - Eigenschaften

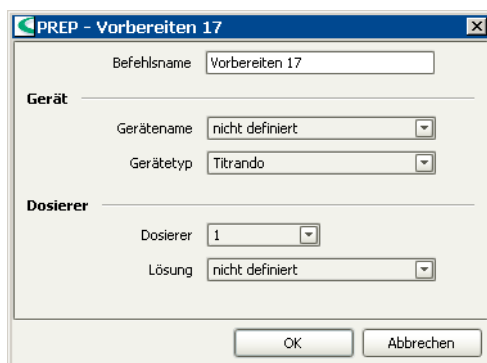

Befehlsname

25 Zeichen, [Vorbereiten #]

Name des Befehls.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [Titrando]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Dosierer

Dosierer

[1] ... 4 (Titrando, 846)

[1] ... 3 (778, 789, 814, 815)

[1] ... 12 (730, 774)

[intern D0], extern D1, extern D2 (736, 751, 758, 799)

Auswahl des Dosierers, der vorbereitet werden soll. Es werden immer alle Dosierer-Anschlüsse angezeigt, welche für den gewählten Gerätetyp möglich sind.

Lösung

Titriermittel/Lösung, [nicht definiert]

Auswahl der in der Lösungstabelle aufgeführten Titriermittel und Lösungen.

EMPTY

Befehl zum **Leeren von Zylinder und Schläuchen** einer Dosiereinheit.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Titrando: 808, 809, 835, 836, 841

Dosing Interface: 846

Probenwechsler: 778, 789, 814, 815

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **EMPTY** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **EMPTY**

EMPTY - Eigenschaften

Befehlsname

25 Zeichen, [Leeren #]
Name des Befehls.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [Titrande]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Dosierer

Dosierer

[1] ... 4 (Titrande, 846)

[1] ... 3 (814, 815)

Auswahl des Dosierers (nur Dosino), der geleert werden soll. Es werden immer alle Dosierer-Anschlüsse angezeigt, welche für den gewählten Gerätetyp möglich sind.

Lösung

Titriermittel/Lösung, [nicht definiert]

Auswahl der in der Lösungstabelle aufgeführten Titriermittel und Lösungen.

5.6.9 Automationsbefehle

Befehle für die Bedienung von Probenwechslern.

Es können die folgenden acht Automations-Befehle ausgewählt werden:

- **MOVE**
Anfahren einer Rackposition oder einer externen Position.
- **SWING**
Schwenken des Schwenkarmes (nur mit Swing Head).
- **LIFT**
Anfahren einer Liftposition.
- **PUMP**
Ein-/Ausschalten der angeschlossenen Pumpen.
- **STIR**
Steuerung eines angeschlossenen Rührers.
- **RACK**
Initialisierung des aufgesetzten Racks.
- **HEATER**
Steuerung der Ofentemperatur des 774 Oven Sample Processor.
- **FLOW**
Gasflusskontrolle des 774 Oven Sample Processor.

MOVE

Befehl zum **Anfahren der gewünschten Rackposition** (Probenposition oder Spezialbecher).

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Probenwechsler: 730, 774, 778, 789, 814, 815

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **MOVE** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **MOVE**

MOVE - Eigenschaften

Befehlsname

25 Zeichen, [Drehen #]
Name des Befehls.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [814 USB Sample Processor]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Ziel

Turm

[1], 2

Auswahl des Turms am Probenwechsler für das Drehen zur gewünschten Position. Es stehen immer Turm 1 und Turm 2 zur Auswahl, auch wenn der Probenwechsler nur einen Turm besitzt.

Drehen

Auswahl der Zielposition auf dem Rack:

[Probenposition]

Position, welche im Ablauffenster als Parameter **Probenposition** definiert ist.

Rackposition

Position auf dem Rack.

Spezialbecher

Spezialposition auf dem Rack, die in den Rackeigenschaften (siehe Eigenschaften Rack - Spezialbecher) definiert ist.

Relativer Winkel (nur für 778, 789, 814, 815)

Das Probenrack kann unabhängig von Rackpositionen um einen bestimmten Winkel gedreht werden. Diese Funktion kann z. B. zum automatischen Entfernen von Probendeckeln verwendet werden.

Nummer

[1] ... 999

Angabe der Nummer der Rackposition. Dieser Parameter ist nur für **Drehen** = **Rackposition** oder **Spezialbecher** sichtbar. Die Position kann auch als Formel eingegeben werden, was z. B. bei der automatischen Kalibrierung von Elektroden nötig ist. Der Formel-Editor (siehe Formel-Editor) wird mit einem Rechtsklick auf das Eingabefeld geöffnet.

Drehwinkel

-259.90 ... [5.00] ... 259.90 °

Dieser Parameter gibt an, um welchen Winkel das Probenrack relativ zur momentanen Position gedreht werden soll. Er ist nur für **Drehen** = **Relativer Winkel** sichtbar.

Bechertest

Auswahl der Aktion, die durchgeführt werden soll, wenn der für das Rack definierte **Bechersensor** an der Zielposition keinen Becher detektiert. Ist der **Schwenkarm** als Bechersensor gewählt, muss ein Swing Head installiert sein sowie eine ebenfalls in den Rackdaten definierte **Arbeitsposition** so definiert werden, dass ein Kontakt zwischen Bechersensor und Becher besteht. Diese Arbeitsposition wird im Anschluss an den **MOVE**-Befehl zur Bechererkennung automatisch angefahren. Für **Drehen** = **Relativer Winkel** ist dieser Abschnitt nicht sichtbar.

Meldung anzeigen

[ein], aus

Es wird eine Meldung angezeigt und die Bestimmung wird abgebrochen.

Bestimmung abbrechen

ein, [aus]

Die Bestimmung wird abgebrochen und die nächste Bestimmung der Serie gestartet.

Bestimmung und Serie abbrechen

ein, [aus]

Sowohl die Bestimmung als auch die Serie werden abgebrochen und eine allfällige Fehlerspur gestartet.

Parameter

Drehgeschwindigkeit

3 ... [20] °/s

Wahl der Geschwindigkeit beim Drehen des Racks.

Drehrichtung

[auto], +, -

Wahl der Drehrichtung. Mit **auto** wird automatisch die Drehrichtung mit dem kleineren Drehwinkel gewählt. Mit "+" wird in jedem Fall im Gegenuhrzeigersinn, mit "-" im Uhrzeigersinn gedreht.

Schwenkgeschwindigkeit

10 ... [55] °/s

Wahl der Geschwindigkeit beim Drehen des Schwenkarms beim Anfahren einer Rackposition oder eines Spezialbechers (nur bei mehrreihigen Racks).

SWING

Befehl zum **Schwenken des Schwenkarmes**. Dieser Befehl ist nur ausführbar, wenn der Sample Processor mit einem **786 Swing Head** mit Schwenkarm ausgerüstet ist.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Probenwechsler: 778, 789, 814, 815

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **SWING** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **SWING**

SWING - Eigenschaften

Befehlsname

25 Zeichen, [Schwenken #]
Name des Befehls.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [814 USB Sample Processor]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Ziel

Turm

[1], 2

Auswahl des Turms am Probenwechsler, an dem der Schwenkarm zur gewünschten Position bewegt werden soll. Es stehen immer Turm 1 und Turm 2 zur Auswahl, auch wenn der Sample Processor nur einen Turm besitzt.

Schwenken

Auswahl der Zielposition für den Schwenkarm:

[**Externe Position**]

Schwenken auf eine der 4 pro Turm definierten externen Positionen, die in den Turmeigenschaften des Sample Processors definiert werden.

Maximaler Winkel

Schwenken auf den maximal zulässigen Winkel nach aussen (siehe Schwenkarm-Eigenschaften).

Relativer Winkel

Schwenken um den angegebenen Schwenkwinkel relativ zur aktuellen Position. Diese Funktion kann z. B. zum automatischen Entfernen von Probendeckeln verwendet werden.

Nummer

[1] ... 4

Angabe der Nummer der externen Position, auf welche geschwenkt werden soll. Dieser Parameter ist nur für **Schwenken = Externe Position** sichtbar.

Schwenkwinkel

-180.0 ... [10.0] ... 180.0 °

Winkel, um den der Schwenkarm relativ zur aktuellen Position geschwenkt werden soll. Dieser Parameter ist nur für **Schwenken = Relativer Winkel** sichtbar.

Parameter

Schwenkgeschwindigkeit

10 ... [55] °/s

Wahl der Geschwindigkeit beim Drehen des Schwenkarms beim Anfahren einer externen Position oder eines Winkels.

LIFT

Befehl zum **Anfahren von Arbeits-, Dreh-, Spül- und Spezialpositionen** an einem Probenwechsler.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Probenwechsler: 730, 774, 778, 789, 814, 815

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **LIFT** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **LIFT**

LIFT - Eigenschaften

Befehlsname

25 Zeichen, [Lift #]

Name des Befehls.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [814 USB Sample Processor]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Ziel

Turm

[1], 2

Auswahl des Turms am Probenwechsler für das Anfahren der gewünschten Liftposition. Es stehen immer Turm 1 und Turm 2 zur Auswahl, auch wenn der Probenwechsler nur einen Turm besitzt.

Liftposition

0 ... 235 mm, [Arbeitsposition], Drehposition, Spülposition, Spezialposition, Ruheposition (Probenwechsler 730, 778, 789, 814, 815)

0 ... 100 mm, [Arbeitsposition], Drehposition, Spülposition, Spezialposition, Ruheposition (KF Oven Sample Processor 774)

Eingabe der gewünschten Liftposition in mm oder Auswahl einer der für das Rack vordefinierten Liftpositionen **Arbeitsposition**, **Drehposition**, **Spülposition** oder **Spezialposition**. Eine Lifthöhe von 0 mm entspricht der **Ruheposition**. Dabei wird der Lift ganz nach oben gefahren.

Hinweis

Beachten Sie, dass alle Liftpositionen den in den Turmeigenschaften des Gerätes angegebenen maximalen Liftweg nicht überschreiten.

Parameter

Liftgeschwindigkeit

5 ... [25] °/s

Wahl der Geschwindigkeit für das Bewegen des Lifts.

PUMP

Befehl zur **Steuerung der Pumpen**, die am Probenwechsler angeschlossen oder eingebaut sind.


Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Probenwechsler: 730, 778, 789, 814, 815

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

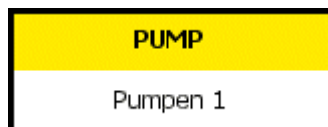

Parameter

Die Parameter für den Befehl **PUMP** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **PUMP**

PUMP - Eigenschaften

Befehlsname

25 Zeichen, [Pumpen #]

Name des Befehls.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [814 USB Sample Processor]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Pumpen

Turm

[1], 2

Auswahl des Turms am Probenwechsler, an dem die Pumpen gesteuert werden sollen. Es stehen immer Turm 1 und Turm 2 zur Auswahl, auch wenn der Probenwechsler nur einen Turm besitzt.

Pumpe(n)

[1], 2, 1+2

Auswahl der Pumpen, die angesteuert werden sollen. Diese können eingebaut oder extern angeschlossen sein. Mit **1+2** werden beide Pumpen des gewählten Turmes gleichzeitig geschaltet.

Aktion

Einschalten

[ein], aus

Einschalten der Pumpen.

Ausschalten

ein, [aus]

Ausschalten der Pumpen.

Dauerbetrieb

ein, [aus]; 0 ... [10.0] ... 9'999.9; [s], min

Einschalten der Pumpen während einer definierten Zeitdauer.

STIR

Befehl zur **Steuerung eines angeschlossenen Rührers**.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Titrimo: 751, 758, 784, 785, 794, 798, 799

Titrando: 808, 809, 835, 836, 841

Dosing Interface: 846

Coulometer: 756, 831

Probenwechsler: 730, 778, 789, 814, 815

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **STIR** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **STIR**

STIR - Eigenschaften

Befehlsname
25 Zeichen, [Rühren #]
Name des Befehls.

Gerät

Gerätename
Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp
Gerätetypen, [814 USB Sample Processor]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Rührer

Rührer

[1] ... 4 (Titrande, 730, 846)
[T1], T2 (Turmrührer), 1...3 (MSB-Rührer) (778, 789)
[1]...3 (814, 815)
1 (756, 831, Titrino)
Auswahl des Rührers.

Rührertyp

801 Magnetrührer, 802 Propellerrührer, 803 Ti Stand Magnetrührer, 804 Ti Stand Propellerrührer, unbekannt

Anzeige des Rührertyps. Bei Geräten, bei denen der Rührertyp nicht ausgelesen werden kann oder wenn keiner angeschlossen ist, wird **unbekannt** angezeigt.

Rührgeschwindigkeit

-15 ... [8] ... 15 (Titrande, 846, 814, 815)
0 ... [8] ... 15 (730, 774, 778, 789)
Einstellen der Rührgeschwindigkeit. Mit dem Vorzeichen der Rührgeschwindigkeit ändert sich die Richtung, in der gerührt wird.

Aktion

Einschalten

[ein], aus
Einschalten des Rührers. Der Rührer bleibt auch nach dem Ende des Befehls eingeschaltet.

Ausschalten

ein, [aus]
Ausschalten des Rührers.

Betriebsdauer

ein, [aus]; 0 ... [10.0] ... 9'999.9; s, [min]
Der Rührer kann für eine bestimmte Zeitdauer eingeschaltet werden.

RACK

Befehl zur **Initialisierung des aufgelegten Probenracks**. Dabei werden das aufgelegte Rack, der Lift und der Schwenkarm (wenn vorhanden) zurückgesetzt, der Rackcode ausgelesen und die entsprechenden Rackdaten in den Sample Processor übertragen.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Probenwechsler: 730, 774, 778, 789, 814, 815

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **RACK** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **RACK**

RACK - Eigenschaften

Befehlsname

25 Zeichen, [Rack initialisieren #]

Name des Befehls.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [814 USB Sample Processor]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Racktest

ein, [aus]

Wird diese Option eingeschaltet, wird überprüft, ob das richtige Rack aufgesetzt ist.

Rack überprüfen

alle in der Konfiguration vorhandenen Probenracks

Auswahl des Racknamens für das Rack, welches aufgesetzt sein muss. Sie können so sicherstellen, dass die Methode nur mit diesem Rack ausführbar ist. Wird beim Ausführen des Befehls ein anderes Rack detektiert, wird eine Meldung angezeigt und eine allfällige Fehlerspur aufgerufen.

HEATER


Befehl zur **Steuerung der Ofentemperatur** am 774 Oven Sample Processor.

Geräte

Dieser Befehl kann nur mit dem 774 Oven Sample Processor ausgeführt werden.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

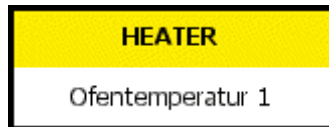

Parameter

Die Parameter für den Befehl **HEATER** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **HEATER**

HEATER - Eigenschaften

Befehlsname

25 Zeichen, [Ofentemperatur #]

Name des Befehls.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines 774 Oven Sample Processors aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

774 Oven Sample Processor

Anzeige des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Heizung

Zieltemperatur

50 ... 250 °C, [Initialtemp.], aus

Temperatur, auf die der Ofen aufgeheizt werden soll. Mit **Initialtemp.** wird beim Einschalten des 774 Oven Sample Processors gleichzeitig die Ofenheizung eingeschaltet und der Ofen auf diese Temperatur geheizt. Die Initialtemperatur muss am 774 Oven Sample Processor definiert werden und wird in der Gerätekonfiguration des 774 Oven Sample Processors angezeigt.

Hinweis

Falls immer bei derselben Temperatur gearbeitet wird, empfiehlt es sich, eine Initialtemperatur zu definieren.

Aufheizdauer

1 ... 999 min, [aus]

Innerhalb dieser Zeit muss die Zieltemperatur erreicht werden. Mit der Aufheizdauer kann die Aufheizrate beeinflusst werden, um Temperaturrampen oder ganze Temperaturprofile (mit mehreren **HEATER**-Befehlen) zu programmieren. **aus** bewirkt das Aufheizen mit der höchstmöglichen Heizrate (siehe Gebrauchsanweisung zum 774 Oven Sample Processor).

Max. Wartezeit

1 ... 999 min, [aus]

Sollte die Zieltemperatur in der definierten **Aufheizdauer** nicht erreicht werden, so beginnt diese Wartezeit zu laufen. Dieser Parameter wird erst sichtbar, wenn für die **Aufheizdauer** eine Zeit definiert wurde.

Aktion nach Ablauf der max. Wartezeit

ein, [aus] (wird nur für **Max. Wartezeit** $\neq$ **aus** angezeigt)

Definition der Aktion, welche ausgelöst werden soll, wenn nach Ablauf der maximalen Wartezeit die Zieltemperatur noch nicht erreicht wurde.

Meldung anzeigen

[ein], aus

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten.

Bestimmung abbrechen

ein, [aus]

Die Bestimmung wird abgebrochen und die nächste Bestimmung der Serie gestartet.

Bestimmung und Serie abbrechen.

ein, [aus]

Sowohl die Bestimmung als auch die Serie werden abgebrochen und eine allfällige Fehlerspur gestartet.

FLOW


Befehl zur **Steuerung des Gasflusses** am 774 Oven Sample Processor.

Geräte

Dieser Befehl kann nur mit dem 774 Oven Sample Processor ausgeführt werden.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

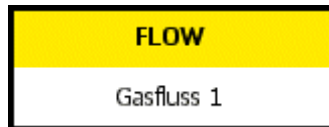

Parameter

Die Parameter für den Befehl **FLOW** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **FLOW**

FLOW - Eigenschaften

Befehlsname

25 Zeichen, [Gasfluss #]
Name des Befehls.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines 774 Oven Sample Processors aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

774 Oven Sample Processor

Anzeige des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Gas

Gastyp

[Luft], Stickstoff, anderes Gas

Gastyp des verwendeten Trägergases.

Gasfluss-Faktor

0.001 ... [1.000] ... 9.999

Faktor zur korrekten Bestimmung des Gasflusses. Dieser Parameter wird nur für **Gastyp = anderes Gas** angezeigt. Die Werte für häufig eingesetzte Trägergase sind in der Gebrauchsanweisung des 774 Oven Sample Processors aufgeführt.

Gasfluss

Einlass

Wahl des Trägergas-Einlasses:

[Pumpe]

Verwendung von Umgebungsluft als Trägergas.

Ventil

Verwendung von Gas aus einer Druckflasche.

Einschalten

[ein], aus

Einschalten des Gasflusses.

Ausschalten

ein, [aus]

Ausschalten des Gasflusses.

5.6.10 Resultatbefehle

Befehle für die **Berechnung, Speicherung und Ausgabe von Resultaten**.

Es können die folgenden Resultat-Befehle ausgewählt werden:

- **CALC**
Berechnen von Zwischen- und Endresultaten, Titerwerten und Common Variablen.
- **DATABASE**
Speichern der Bestimmungsdaten in Datenbanken.
- **EXPORT**
Export von Bestimmungsdaten.
- **REPORT**
Ausgabe eines durch die gewählte Reportvorlage definierten Reports.

CALC

Befehl zur **Berechnung von End- und Zwischenresultaten** sowie Zuweisung von Titern und Common Variablen.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Resultattabelle

Im Eigenschaftfenster des Befehls **CALC** werden alle definierten Resultate in der Resultattabelle angezeigt.

Resultatparameter

Die Parameter für die einzelnen Resultate der Resultattabelle werden auf den folgenden 3 Registerkarten eingestellt:

- **Definition**
Formeleingabe, Zuweisung der Einheit und Ein-/Ausschalten der Statistik.
- **Überwachung**
Einstellungen zur Resultatüberwachung.
- **Optionen**
Resultat als Common Variable oder als Titer speichern.

CALC - Resultattabelle

	Resultatname	Formel	Einheit	Dezimalstellen	Zuordnung	Statistik	Resultat überwachen
1	Blindwert	= 'KFC.EP.QTY'	µg	2	RS01	☒	☐
2	Mittlerer Blindwert	= 'RS.Blindwert.MNW'	µg	2	RS02	☐	☐

Befehlsname
25 Zeichen, [Berechnungen #]
Name des Befehls.

Tabelle

In einem CALC-Befehl können bis zu 25 Resultate definiert werden, die in der Resultattabelle angezeigt werden. Die Tabelle, die nicht direkt editierbar ist, enthält die folgenden Informationen zu den Resultaten:

Resultatname
Name des Resultates.

Formel
Berechnungsformel für das Resultat.

Einheit
Resultateinheit.

Dezimalstellen
Anzahl Dezimalstellen für das Resultat.

Zuordnung
Zuordnung des Resultates zu einer der 25 möglichen Resultatspalten.

Statistik
Anzeige, ob die Statistikberechnung für das Resultat ein- oder ausgeschaltet ist.

Resultat überwachen

Anzeige, ob die Überwachung für das Resultat ein- oder ausgeschaltet ist.

Funktionen



Verschieben des ausgewählten Resultates nach oben (Reihenfolge ändern).



Verschieben des ausgewählten Resultates nach unten (Reihenfolge ändern).

Neu

Öffnen des Dialogfensters **Neues Resultat** (siehe unten) für das Hinzufügen eines neuen Resultates.

Eigenschaften

Öffnen des Dialogfensters **Resultat** (siehe CALC - Resultateigenschaften) für das Bearbeiten der Eigenschaften des in der Tabelle ausgewählten Resultates.

Löschen

Löschen des in der Tabelle ausgewählten Resultates.

Vorlagen

Öffnen des Dialogfensters **Vorlagen verwalten** (siehe CALC - Resultatvorlagen) für das Löschen oder Umbenennen von Resultatvorlagen.

Neues Resultat

Mit **[Neu]** im Eigenschaftensfenster des CALC-Befehls wird das Fenster **Neues Resultat** geöffnet, in dem eine Vorlage für das neue Resultat ausgewählt werden kann.



Vorlagen

Resultatvorlagen, [Leer]

Auswahl einer gespeicherten Resultatvorlage als Grundlage für das Erstellen eines neuen Resultates. Mit **Leer** wird eine leere Vorlage geladen.

Beschreibung

Anzeige der Beschreibung zur ausgewählten Resultatvorlage.

Weiter >>

Öffnen des Dialogfensters **Resultat** (siehe CALC - Resultateigenschaften) für das Bearbeiten der Eigenschaften des neuen Resultates.

CALC Resultateigenschaften

Definition

Auf dieser Registerkarte wird die Resultatberechnung definiert.

Resultatname

50 Zeichen, [Res01 ... Res025]

Name des Resultates. Dieser Name erscheint in der Resultatanzeige und im Report. Der Resultatname kann als Variable '**RS.Resultatname.VAL**' in weiteren Berechnungen verwendet werden.

Formel

1000 Zeichen

Anzeige der Berechnungsformel für das Resultat. Mit einem Klick auf  oder einem Doppelklick in das Fenster wird der Formel-Editor geöffnet, in dem die Formel eingegeben werden kann. Das Resultat der Berechnungsformel definiert, vom welchem Typ (**Zahl**, **Text** oder **Datum/Zeit**) das Resultat ist.

Einheit

max. 16 Zeichen, [leer], ppm, %, g/L, mg/L, mg/mL, mg/100 g, mol/L, mmol/L, mL, g, mg, µg, °C, µL, s, S/cm, mS/cm, µS/cm

Einheit des Resultates für die Ausgabe (nur Text). Die Einheit kann als Variable '**RS.Resultatname.UNI**' in weiteren Berechnungen verwendet werden.

Dezimalstellen

0 ... [2] ...5

Anzahl Dezimalstellen für die Ausgabe des berechneten Resultates. Für Resultate vom Typ **Text** oder **Datum/Zeit** wird dieser Parameter ignoriert.

Zuordnung

RS01 ... RS25, [erste freie Resultatvariable], keine

Zuordnung des Resultates zu einer der 25 möglichen Resultatspalten **RS01 ... RS25** in der Bestimmungsübersicht, in die das Resultat eingefüllt wird. Mit **keine** wird das Resultat keiner Resultatspalte zugeordnet und nur im Unterfenster **Resultate** angezeigt.

Hinweis

Die Zuordnungen **RS01 ... RS25** können in verschiedenen CALC-Befehlen mehrfach verwendet werden. In diesem Fall wird immer nur das zuletzt berechnete Resultat in der zugeordneten Resultatspalte eingetragen. So ist es möglich, Alternativresultate, die in verschiedenen CALC-Befehlen berechnet wurden, trotzdem in der gleichen Resultatspalte anzuzeigen oder die gleiche Reportvorlage zu verwenden.

Achtung

Wird die gleiche **Zuordnung** in mehreren CALC-Befehlen mit verschiedenen **Resultatnamen** verwendet, wird nur das zuletzt berechnete Resultat in der Bestimmung gespeichert. Alle anderen Resultate sind nicht mehr vorhanden bzw. ungültig, wenn sie in anderen Formeln verwendet werden!

Statistik

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, so werden Mittelwert sowie absolute und relative Standardabweichung für das Resultat berechnet. Voraussetzung für die Durchführung der Statistikberechnungen ist, dass die Statistik zusätzlich sowohl im **START**-Befehl wie auch im Ablauffenster eingeschaltet ist.

Beschreibung

1000 Zeichen

Frei wählbare Beschreibung des Resultates.

Als Vorlage speichern

Öffnen des Dialogfensters **Resultatvorlage speichern** zum Speichern der Resultatparameter als Vorlage für das Erstellen von neuen Resultaten.

Überwachung

Auf dieser Registerkarte wird die Resultatüberwachung konfiguriert.

Resultat überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird bei der Berechnung des Resultates während der Bestimmung überprüft, ob es innerhalb der definierten Grenzwerte liegt.

Untere Grenze

10 Ziffern

Unterer Grenzwert für das Resultat.

Obere Grenze

10 Ziffern

Oberer Grenzwert für das Resultat.

Meldung

Text (unbegrenzt)

Die hier definierte Meldung kann beim Unterschreiten des unteren bzw. beim Überschreiten des oberen Grenzwertes gleichzeitig auf verschiedene

Ziele ausgegeben werden. Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verändert werden kann. Innerhalb des Textfeldes kann auch der Formeleditor aufgerufen werden.

Meldung anzeigen

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, werden bei einer Grenzwertverletzung alle aktiven Spuren angehalten und die im Textfeld definierte Meldung angezeigt. Mit **[Weiter]** wird entweder der Ablauf der angehaltenen Spuren fortgesetzt oder - falls definiert - die untenstehende **Aktion** ausgelöst.

Meldung dokumentieren


[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird bei einer Grenzwertverletzung die im Textfeld definierte Meldung in der Bestimmung dokumentiert. Der Ablauf wird nicht angehalten.

Meldung per E-Mail

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird bei einer Grenzwertverletzung die im Textfeld definierte Meldung an die unter **[E-mail]** definierte Adresse ausgegeben.

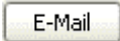 E-Mail

Mit dieser Schaltfläche öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** (siehe unten) für die Definition der E-Mail-Parameter.

Akustisches Signal

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird bei einer Grenzwertverletzung zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird bei einer Grenzwertverletzung automatisch eine der folgenden Aktionen ausgeführt.

Bestimmung abbrechen

[ein], aus

Die Bestimmung wird abgebrochen und die nächste Bestimmung der Serie gestartet.

Bestimmung und Serie abbrechen

ein, [aus]

Sowohl die Bestimmung als auch die Serie werden abgebrochen.

Als Vorlage speichern

Öffnen des Dialogfensters **Resultatvorlage speichern** zum Speichern der Resultatparameter als Vorlage für das Erstellen von neuen Resultaten.

Resultat - Optionen

Auf dieser Registerkarte kann das Resultat einer Common Variable und/oder einem Titer zugewiesen werden.

Resultat speichern als Common Variable

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird das Resultat unter dem ausgewählten Namen als Common Variable gespeichert. Ist die Statistik für dieses Resultat eingeschaltet, wird automatisch der aktuelle Mittelwert für dieses Resultat als Common Variable gespeichert.

Name

Auswahl aus definierten Common Variablen

Name der Common Variablen, für die das Resultat als neuer Wert gespeichert werden soll.

Hinweis

Wenn noch keine Common Variablen definiert sind, ist die Auswahlbox leer. Das Erstellen von Common Variablen ist in der Konfiguration (siehe Konfiguration - Common Variablen) beschrieben.

Resultat speichern als Titer

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird das Resultat unter dem ausgewählten Namen als Titer gespeichert. Ist die Statistik für dieses Resultat eingeschaltet, wird automatisch der aktuelle Mittelwert für dieses Resultat als Titer gespeichert.

Lösungsname

Auswahl aus definierten Lösungen

Name der Lösung, für die das Resultat als Titer gespeichert werden soll.

Hinweis

Wenn noch keine Lösungen definiert sind, ist die Auswahlbox leer. Das Erstellen von Lösungen ist in der Konfiguration (siehe Konfiguration - Lösungen) beschrieben.

Als Vorlage speichern

Öffnen des Dialogfensters **Resultatvorlage speichern** zum Speichern der Resultatparameter als Vorlage für das Erstellen von neuen Resultaten.

E-Mail senden

Mail an

max. 150 Zeichen

E-Mail-Adresse des Empfängers.

Betreff

max. 150 Zeichen

Betreff zur Beschreibung der Nachricht.

Konfiguration

Anwender

max. 150 Zeichen

Anwendername für den Zugang zum Mail-Server. Dieser Name muss nicht mit dem Windows-Anwendername übereinstimmen.

Passwort

max. 150 Zeichen

Passwort für den Zugang zum Mail-Server. Dieses Passwort muss nicht mit dem Windows-Passwort übereinstimmen.

Mail von

max. 150 Zeichen

E-Mail-Adresse des Absenders.

SMTP-Server

max. 150 Zeichen

Adresse des SMTP-Servers.

POP3-Server

max. 150 Zeichen

Adresse des POP3-Servers.

Resultatvorlagen

Resultatvorlagen verwalten

Mit [**Vorlagen**] im Eigenschaftsfenster des **CALC**-Befehls wird das Fenster **Vorlagen verwalten** geöffnet, in dem Resultatvorlagen umbenannt und gelöscht werden können.

Vorlagen

Resultatvorlagen, [Leer]

Auswahl der gespeicherten Resultatvorlage, die umbenannt oder gelöscht werden soll.

Beschreibung

Anzeige der Beschreibung zur ausgewählten Resultatvorlage.

Umbenennen

Ausgewählte Resultatvorlage umbenennen.

Löschen

Ausgewählte Resultatvorlage löschen.

Resultatvorlage speichern

Name der Resultatvorlage

100 Zeichen, [Resultatname]

Name, unter dem die Resultatvorlage global in der Konfigurationsdatenbank gespeichert wird.

Beschreibung

1000 Zeichen

Frei definierbare Beschreibung der Resultatvorlage. Diese Beschreibung wird in den Dialogfenstern **Neues Resultat** und **Vorlagen verwalten** angezeigt.

Resultatvorlage umbenennen

Name der Resultatvorlage

100 Zeichen, [Name der Resultatvorlage]

Name, unter dem die Resultatvorlage global in der Konfigurationsdatenbank gespeichert wird.

Beschreibung

1000 Zeichen

Frei definierbare Beschreibung der Resultatvorlage. Diese Beschreibung wird in den Dialogfenstern **Neues Resultat** und **Vorlagen verwalten** angezeigt.

DATABASE

Befehl zum Speichern von Bestimmungsdaten in eine oder mehrere **Datenbanken**.

Aussehen


Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Datenbankliste

Im Eigenschaftfenster des Befehls **DATABASE** werden alle definierten Datenbanken in der Datenbankliste angezeigt.

DATABASE - Eigenschaften

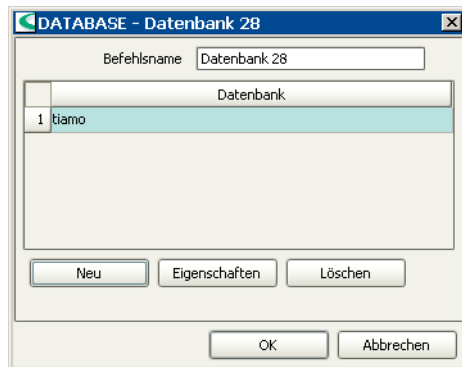

Befehlsname

25 Zeichen, [Datenbank #]
Name des Befehls.

Datenbankliste

In einem **DATABASE**-Befehl können eine oder mehrere Datenbanken definiert werden, in welchen die bei der Befehlsausführung vorliegenden Bestimmungsdaten gespeichert werden. Sind mehrere Datenbanken definiert, wird die Bestimmung in jeder Datenbank mit der gleichen Bestimmungs-ID abgelegt.


Datenbank

Name der Datenbank, in der die Bestimmungsdaten gespeichert werden.


Funktionen



Öffnen des Dialogfensters **Datenbank - Neu** für die Auswahl einer neuen Datenbank.

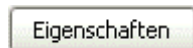

Öffnen des Dialogfensters **Datenbank** für die ausgewählte Datenbank.

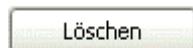

Löschen der in der Liste ausgewählten Datenbank.

Hinweis

Um sicherzustellen, dass sämtliche Daten einer Bestimmung gespeichert werden, muss der Befehl **DATABASE** am Schluss des Methodenablaufs eingefügt werden.

REPORT

Befehl zur **Ausgabe von Bestimmungsdaten**.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter


Die Parameter für den Befehl **REPORT** werden im folgenden Eigenschaftensfenster eingestellt:

- **REPORT**

Hinweis

Ein **REPORT**-Befehl muss immer vor einem allfälligen **DATABASE**-Befehl platziert werden, da sonst die Befehlsdaten (z. B. die verwendete Reportvorlage) nicht gespeichert werden und so kein Nachbearbeiten möglich ist.

REPORT - Eigenschaften

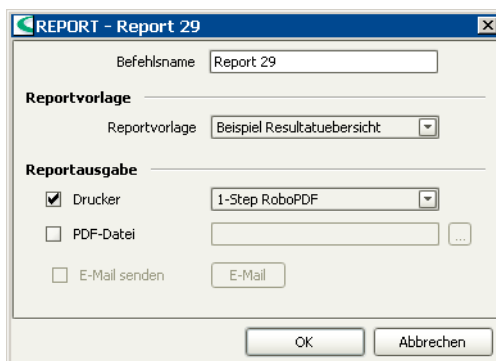

Befehlsname
25 Zeichen, [Report #]
Name des Befehls.

Reportvorlage

Reportvorlage

Reportvorlagen

Auswahl der gespeicherten Reportvorlage, mit welcher der Report erstellt werden soll.

Reportausgabe

Drucker

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Report auf den ausgewählten Drucker ausgegeben.

PDF-Datei


ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Report als PDF-Datei im ausgewählten Verzeichnis gespeichert. Mit  öffnet sich das Fenster **Speichern**, in dem das gewünschte Verzeichnis ausgewählt und ein Stammname für die PDF-Datei eingegeben werden kann.

E-Mail senden

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird die PDF-Datei zusätzlich an die unter **[E-Mail]** definierte Adresse ausgegeben.

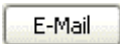 E-Mail

Mit dieser Schaltfläche öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** (siehe *CALC - Resultateigenschaften - E-Mail senden*) für die Definition der E-Mail-Parameter.

EXPORT

Befehl zum **Exportieren von Bestimmungsdaten**.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:




Parameter

Die Parameter für den Befehl **EXPORT** werden im folgenden Eigenschaftensfenster eingestellt:

- **EXPORT**

EXPORT - Eigenschaften

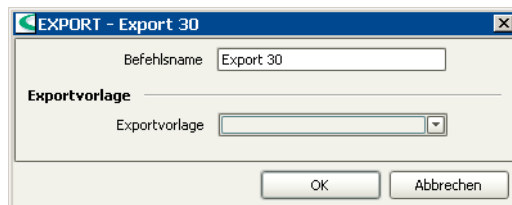

Befehlsname

25 Zeichen, [Export #]

Name des Befehls.

Exportvorlage

Exportvorlage

Exportvorlagen

Auswahl der gespeicherten Exportvorlage, mit welcher die Bestimmungsdaten exportiert werden sollen.

5.6.11 Kommunikationsbefehle

Befehle für die Kommunikation innerhalb des Programms oder mit externen Geräten.

Es können die folgenden Kommunikations-Befehle ausgewählt werden:

- **CTRL**
Setzen von Remote-Ausgangsleitungen.
- **SCAN**
Abfragen von Remote-Eingangsleitungen.
- **SEND**
Senden von Ereignismeldungen.
- **RECEIVE**
Abwarten von Ereignis- oder Statusmeldungen.
- **TRANSFER**
Datentransfer via RS232 zu externen Geräten.

CTRL

Befehl zum **Setzen von Remote-Ausgangsleitungen**.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Titrimo: 751, 758, 784, 785, 795, 798, 799


Titrando: 808, 809, 835, 836, 841, 846

Coulometer: 756, 831

Probenwechsler: 730, 774, 778, 789, 814, 815

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

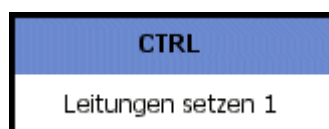


Parameter

Die Parameter für den Befehl **CTRL** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **CTRL**

CTRL - Eigenschaften

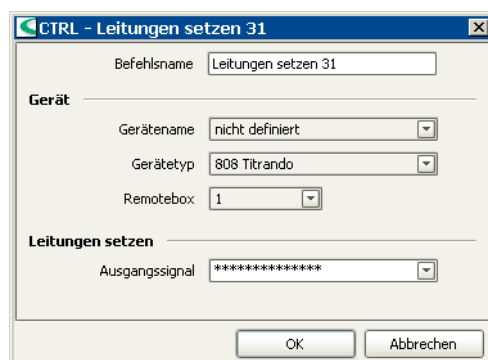

Befehlsname

25 Zeichen, [Leitungen setzen #]

Name des Befehls.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [Titrande]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Remotebox

[1] ... 4 (nur Titrande, 814, 815)

Auswahl der am Gerät angeschlossenen Remotebox, an der die Leitungen gesetzt werden sollen.

Leitungen setzen

Ausgangssignal

Bitmuster aus genau 14 Zeichen (0, 1, *, p), [***], Signalvorlage**

Eingabe des Bitmusters für das Ausgangssignal oder Auswahl einer vordefinierten Signalvorlage.

Eingegeben werden können die folgenden Zeichen:

0 = Leitung inaktiv

1 = Leitung aktiv

***** = beliebiger Leitungszustand

p = Puls setzen (Pulslänge = 200 ms. Soll ein Puls mit einer anderen Länge ausgegeben werden, muss dafür eine entsprechende Vorlage definiert werden.)

Die Bits werden dabei von rechts nach links nummeriert:

Output 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Bit 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Beispiel: *******1*** setzt die Output-Leitung 1 auf aktiv (= gesetzt), was z. B. bei einem angeschlossenen Titrande einen Stop-Befehl bewirken würde. *******0*** setzt die Leitung auf inaktiv.

Hinweis

*Es empfiehlt sich, die nicht relevanten Ausgangsleitungen mit einem Stern * zu maskieren, um diese Leitungszustände nicht zu verändern.*

SCAN

Befehl zum **Abfragen von Remote-Eingangsleitungen**.

Geräte

Dieser Befehl kann nur mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Titrimo: 751, 758, 784, 785, 795, 798, 799


Titrando: 808, 809, 835, 836, 841, 846

Coulometer: 756, 831

Probenwechsler: 730, 774, 778, 789, 814, 815

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

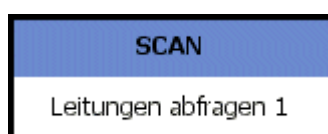

Parameter

Die Parameter für den Befehl **SCAN** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **SCAN**

SCAN - Eigenschaften

Befehlsname

25 Zeichen, [Leitungen abfragen #]
Name des Befehls.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetypen, [Titrando]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Remotebox

[1] ... 4 (nur Titrand, 814, 815)

Auswahl der am Gerät angeschlossenen Remotebox, an der die Leitungen abgefragt werden sollen.

Leitungen abfragen

Eingangssignal

Bitmuster aus 8 Zeichen (0, 1, *), [***], Signalvorlage**

Eingabe des Bitmusters für das erwartete Eingangssignal oder Auswahl einer vordefinierten Signalvorlage.

Eingegeben werden können die folgenden Zeichen:

0 = Leitung inaktiv

1 = Leitung aktiv

***** = beliebiger Leitungszustand

Die Bits werden dabei von rechts nach links nummeriert:

Input	7	6	5	4	3	2	1	0
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0

Beispiel: ***1** erwartet eine aktive Input-Leitung 0 (**1** = gesetzt). Diese Leitung wird z.B. von einem Titrand gesetzt, nachdem eine Titration beendet worden ist und der Titrand wieder ein Start-Signal entgegennehmen kann.

Hinweis

*Eingangsleitungen, die nicht interessieren oder bei denen kein definierter Zustand vorausgesagt werden kann, sollten mit einem Stern * maskiert werden.*

Max. Wartezeit

ein, [aus]

Maximale Wartezeit auf das Eingangssignal.

SEND

Befehl zum **Senden von Ereignismeldungen** an Befehle, Spuren oder an *tiamo*.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **SEND** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **SEND**

SEND - Eigenschaften

	Empfänger	Auswahl	Ereignismeldung	Kommentar
1	Befehl	Spur 2	Hold	Spur anhalten

Befehlsname
25 Zeichen, [Senden #]
 Name des Befehls.

Senden von Ereignismeldungen

Alle definierten Ereignismeldungen, die in der Tabelle aufgelistet sind, werden gleichzeitig gesendet. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar.

Neu

Öffnen des Dialogfensters **Senden der Ereignismeldungen** zur Eingabe einer neuen Ereignismeldung.

Hinweis

Es können maximal 10 Ereignismeldungen eingegeben werden.

Eigenschaften

Öffnen des Dialogfensters **Senden der Ereignismeldungen** zum Bearbeiten der in der Tabelle ausgewählten Ereignismeldung.

Löschen

Ausgewählte Ereignismeldung löschen.

SEND - Ereignismeldungen

Empfänger
[System], Befehl
 Auswahl des Empfängertyps.

Auswahl
Befehlsname, ['leer']

Auswahl der Empfängeradresse. Für den **Empfänger Befehl** stehen alle in der Methode bereits definierten Befehlsnamen zur Verfügung. Für den **Empfänger System** ist dieses Feld leer und nicht editierbar.

Ereignismeldung

[Quit], Hold, Stop (für **Empfänger = System**)

[Quit], Hold, Continue, Start Titration (für **Empfänger = Befehl**)

Wahl der Ereignismeldung, die gesendet werden soll. Je nach Empfänger können die folgenden Ereignismeldungen ausgewählt werden:

Empfänger	Auswahl	Ereignismeldung	Bedeutung
System	-	Hold	Bestimmung (sämtliche Spuren) anhalten. Dies entspricht dem [Hold] -Knopf im Dialogfenster Ablauf.
System	-	Quit	Bestimmung abbrechen (Serie läuft weiter).
System	-	Stop	Bestimmung und Serie abbrechen. Dies entspricht dem [Stop] -Knopf im Dialogfenster Ablauf.
Befehl	Alle Spurbefehle	Hold	Ausgewählte Spur anhalten.
Befehl	Alle Spurbefehle	Continue	Ausgewählte Spur fortführen.
Befehl	Alle Spurbefehle	Quit	Ausgewählte Spur abbrechen. Enthält die ausgewählte Spur einen Befehl, der am Konditionieren ist, wird das Konditionieren nur abgebrochen, wenn im START -Befehl die Option Automatisches Konditionieren ausgeschaltet ist.
Befehl	Alle Befehle	Hold	Ausgewählten Befehl anhalten. Dies gilt auch für das Konditionieren.
Befehl	Alle Befehle	Continue	Ausgewählten Befehl fortführen. Dies gilt auch für das Konditionieren.
Befehl	Alle Befehle	Quit	Ausgewählten Befehl abbrechen. Ist der ausgewählte Befehl am Konditionieren, wird das Konditionieren nur abgebrochen, wenn im START -Befehl die Option Automatisches Konditionieren ausgeschaltet ist.
Befehl	SET, KFT, KFC	Start Titration	Titration starten. Dazu muss beim Titrationsbefehl die Option Titration erst nach Startbefehl von SEND-Befehl starten auf der Registerkarte Konditionieren (Bsp.: KFT) eingeschaltet sein.

Hinweis

Damit die vom **SEND-Befehl** gesendete Ereignismeldung von einem **Empfänger-Befehl** verarbeitet werden kann, muss dieser laufen und zugleich in der Lage sein, die gesendete Meldung zu verarbeiten. Soll beispielsweise ein **SEND-Befehl** in der Spur A einen **KFT-Befehl** in der Spur B mittels **Start Titration** starten, muss zu dem Zeitpunkt, in dem der **SEND-Befehl** ausgeführt wird, die Spur B laufen und das Konditionieren im **KFT-Befehl** muss bereits abgeschlossen sein (= **Cond ok**), damit die Titration gestartet werden kann. Ansonsten würde die Anweisung **Start Titration** ohne Meldung verworfen.

Kommentar

250 Zeichen, ['leer']

Kommentar zur Ereignismeldung.

RECEIVE

Befehl zum **Abwarten von Ereignis- oder Statusmeldungen**, welche von einem Befehl erzeugt werden.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **RECEIVE** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **RECEIVE**

RECEIVE- Eigenschaften

Befehlsname
25 Zeichen, [Empfangen #]
Name des Befehls.

Warten auf Ereignis/Status

Warten bis alle Bedingungen erfüllt sind
[ein], aus

Es wird gewartet, bis **alle** in der Tabelle aufgelisteten Bedingungen erfüllt sind.

Warten bis eine Bedingung erfüllt ist
ein, [aus]

Es wird gewartet, bis **eine** in der Tabelle aufgelistete Bedingung erfüllt ist.

Tabelle mit Bedingungen

Die Übersichtstabelle zeigt alle deklarierten Bedingungen an und ist selber nicht direkt editierbar.

Neu

Öffnen des Dialogfensters **Warten auf Ereignis/Status** zur Eingabe einer neuen Ereignismeldung, welche abgewartet werden soll.

Hinweis

Es können maximal 10 Ereignismeldungen eingegeben werden.

Eigenschaften

Öffnen des Dialogfensters **Warten auf Ereignis/Status** zum Bearbeiten der in der Tabelle ausgewählten Ereignismeldung, welche abgewartet werden soll.

Löschen

Ausgewählte Ereignismeldung löschen.

Max. Wartezeit


[ein], aus
[0] ... 9999.9; [min], s

Optionale Eingabe einer maximalen Wartezeit. Sollte nach Ablauf dieser Zeit keine der in der Tabelle definierten Bedingungen erfüllt sein, wird der Befehl abgebrochen und der nächstfolgende abgearbeitet.

Meldung

Die hier definierte Meldung wird während der Zeit, in der auf das Ereignis gewartet wird, im Livefenster angezeigt. Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verändert werden kann.

SEND - Ereignis/Status

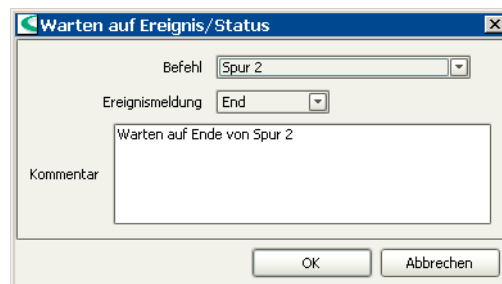

Befehl

Befehl

Name des Befehls, auf dessen Ereignismeldung oder Status gewartet werden soll.

Ereignis/Status

Ereignismeldung, ['leer']

Auswahl der Ereignismeldung, auf deren Empfang gewartet werden soll oder Status, auf dessen Erreichen gewartet werden soll. Folgende Ereignismeldungen und Stati können ausgewählt werden:

Ereignis/Status	Typ	Bedeutung	Befehle
Start	Ereignis	Befehl wurde gestartet.	Alle
End	Ereignis	Befehl wurde beendet.	Alle
Dosing	Ereignis	Bei der Titration wurde das Dosieren gestartet.	DET, MET
Measure	Ereignis	Bei der Titration wurde die Messung gestartet.	DET, MET
Busy	Status	Befehl befindet sich im Zustand BUSY , HOLD oder ERROR .	Alle
Finished	Status	Befehl wurde mindestens einmal beendet.	Alle
Cond	Status	Befehl befindet sich im Zustand Konditionieren (COND BUSY oder COND HOLD), die Startdrift ist noch nicht erreicht.	SET, KFT, KFC
Condok	Status	Befehl befindet sich im Zustand Konditionieren (COND READY), die Startdrift ist erreicht.	SET, KFT, KFC

Hinweis

Damit ein **RECEIVE**-Befehl ein **Ereignis** als solches empfangen kann, muss der **RECEIVE**-Befehl zum Zeitpunkt des Ereignisses aktiv sein, d.h. er muss vor dem entsprechenden Ereignis gestartet worden sein. Ein **Status** hingegen kann jederzeit abgefragt werden.

Kommentar

250 Zeichen, ['leer']

Kommentar zur Ereignismeldung

TRANSFER

Befehl für den **Datentransfer via RS232** zu externen Geräten.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **TRANSFER** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **TRANSFER**

TRANSFER - Eigenschaften

Befehlsname

25 Zeichen, [Transfer #]
Name des Befehls.

Gerät

Gerätename

Gerätename, [nicht definiert]

Auswahl eines RS232-Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Zusätzlich kann **nicht definiert** ausgewählt werden. In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Gerätetyp, [RS232-Gerät]

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Transferanweisungen

Die definierten Transferanweisungen werden in der Reihenfolge, in der sie aufgelistet sind, gesendet. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar.



Verschieben der ausgewählten Anweisung nach oben (Reihenfolge ändern).



Verschieben der ausgewählten Anweisung nach unten (Reihenfolge ändern).



Öffnen des Dialogfensters **Transferanweisungen** zur Eingabe einer neuen Transferanweisung.

Hinweis

Es können maximal 10 Transferanweisungen eingegeben werden.

Eigenschaften

Öffnen des Dialogfensters **Transferanweisungen** zum Bearbeiten der in der Tabelle ausgewählten Transferanweisung.

Löschen

Ausgewählte Transferanweisung löschen.

Max. Wartezeit

ein, [aus]
[0] ... 9999.9; [min], s

Optionale Eingabe einer maximalen Wartezeit. Sind nach Ablauf dieser Zeit nicht alle Transferanweisungen beendet, wird der Befehl abgebrochen und der nächstfolgende abgearbeitet..

TRANSFER - Transferanweisungen

Name

50 Zeichen, ['leer']

Frei definierbarer Name für die Transferanweisung.

Aktion

[Lesen]

Die in **Anweisung** definierte Zeichenkette (optional) wird an das Gerät gesendet und innert der für das Gerät definierten **Max. Wartezeit** die Antwort erwartet und ausgewertet.

Schreiben

Die in **Anweisung** definierte Zeichenkette wird an das Gerät gesendet.

Warten auf

Die in **Anweisung** definierte Zeichenkette (optional) wird an das Gerät gesendet und solange gewartet, bis eine empfangene Zeichenkette dem regulären Ausdruck in **Vergleich** entspricht. Falls dies nicht innerhalb der **Max. Wartezeit** erfolgt, wird der Befehl abgebrochen.

Abfragen

Die in **Anweisung** definierte Zeichenkette wird im Sekundentakt an das Gerät gesendet, bis eine empfangene Zeichenkette dem regulären Ausdruck in **Vergleich** entspricht. Falls dies nicht innerhalb der **Max. Wartezeit** erfolgt, wird der Befehl abgebrochen.

Anweisung

250 Zeichen, ['leer']

Zeichenkette, die an das Gerät gesendet werden soll.

Hinweis

Sämtliche ASCII-Zeichen können auch mit ihrem zweistelligen Hex-Code nach Backslash eingegeben werden (z.B. **|1B = Escape**).

Variable

Methodenvariablen

Auswahl einer vorhandenen Methodenvariablen, unter der die empfangenen Daten bei den **Aktionen Lesen, Warten auf** und **Abfragen** gespeichert werden sollen. Dazu müssen im **START**-Befehl Methodenvariablen definiert sein, die keiner Systemvariablen zugeordnet sein dürfen.

Hinweis

Es können auch mehrere indexierte Variablen (z. B. **Input1, Input2, ...**) angelegt werden, um die mit regulären Ausdrücken abgefragten Teilzeichenketten direkt in verschiedenen Variablen ablegen zu können.

Beispiel

Variable = **MV.Input1**

Vergleich = **(\d+|\.|\d+),(\d+|\.|\d+)**

Zwei Messwerte (durch ein Komma getrennt) werden aus einer beliebigen, empfangenen Zeile herausgefiltert und in den beiden Variablen **MV.Input1** und **MV.Input2** gespeichert.

Vergleich

100 Zeichen, ['leer']

Eingabe einer Zeichenkette, die mit den eingehenden Daten der **Aktionen Lesen, Warten auf** und **Abfragen** verglichen werden sollen. Möglich ist hier die Eingabe von sogenannten **Regulären Ausdrücken**. Mit Hilfe dieser genau definierten Suchmuster können Sie empfangene Zeichenketten interpretieren und bestimmte Inhalte daraus in einer Methodenvariable speichern. Reguläre Ausdrücke werden in der Informatik (Betriebssysteme UNIX oder LINUX, Scriptsprachen PERL, etc.) häufig genutzt und sind weitgehend vereinheitlicht. *tiamo* verwendet **Extended Regular Expressions** gemäss **Java 2 Platform SE v1.4.2** in vollem Umfang (Details siehe z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck).

Beispiele für Reguläre Ausdrücke:

Ausdruck	Bedeutung	Beispiel
[abc]	OR-Funktion für einzelne Zeichen	a oder b oder c empfangen
[a-z0-9]	ein Zeichen im angegebenen Bereich	m oder 5
(hallo)	Teilstring	Zeichenkette enthält hallo
^hallo	Zeilenanfang	hallo steht am Zeilenanfang
hallo\$	Zeilenende	hallo steht am Zeilenende
.	beliebiges, einzelnes Zeichen	a oder 4 oder - oder ...
\.	Punkt	.
\d	eine Ziffer	3
\d+	mehrere Ziffern	324567
\d{4}	vier Ziffern	3143
\D	nicht eine Ziffer	A oder ! oder ...
\w	eine Ziffer oder ein Buchstabe	a oder 3
\W	weder Ziffer noch Buchstabe	! oder .
.*	beliebige Zeichenkette	abcd oder 41 oder -\$=\$ oder ...

Jegliche Kombinationen von regulären Ausdrücken sind möglich.

Hinweis

Um die empfangenen Daten in einer Variable speichern zu können, müssen im Feld **Vergleich** in jedem Fall eine Anfangs- und Schlussklammer gesetzt werden. Um die vollständige, beliebige Zeichenkette in einer Variable abzulegen, muss also im Feld Vergleich der Ausdruck **(.*)** eingegeben werden.

5.6.12 Verschiedene Befehle

Verschiedene Befehle, die unabhängig von den angeschlossenen Geräten verwendet werden können.

Es können die folgenden Befehle ausgewählt werden:

- **CALL**
Aufrufen von Spuren (Unterprogramme).
- **LOOP**
Mehrfache Durchführung von Methodenteilen.
- **WAIT**
Anhalten des Methodenablaufs.
- **REQUEST**
Abfragen von Probedaten.
- **SEQUENCE**
Zusammenfassen von mehreren Einzelbefehlen.

REQUEST

Befehl zur **Abfrage von Probedaten** im Methodenablauf. Die Daten können entweder manuell eingegeben oder von einem Peripheriegerät (Waage, Barcodeleser, etc.) übernommen werden.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

REQUEST
Dateneingabe 1

Parameter

Die Parameter für den Befehl **REQUEST** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **REQUEST**

REQUEST - Eigenschaften

Befehlsname

25 Zeichen, [Dateneingabe #]
Name des Befehls.

Abfrage der Probedaten

Hier können diejenigen Probedaten ausgewählt werden, die erst während der Bestimmung eingegeben werden sollen. Im Methodenablauf erscheint beim Abarbeiten dieses Befehls das Dialogfenster **Abfrage der Probedaten**, in welchem die im Befehl ausgewählten Probenparameter abgefragt werden. Der Ablauf wird so lange angehalten, bis die Eingabe bestätigt wird.

Hinweis

Soll der **Ablauf nicht angehalten** werden (z. B. für Rückwägungen in KF-Titrationen), muss der REQUEST-Befehl in eine andere Spur als diejenige mit dem Titrationsbefehl mit der Option **Sofort zurückmelden** eingefügt werden.

Probenposition

ein, [aus]

Ein-/Ausschalten der Abfrage nach der **Probenposition**.

ID1 ... ID8

ein, [aus]

Ein-/Ausschalten der Abfrage nach den Probenidentifikationen **ID1 ... ID8**. Sind im **START**-Befehl andere Namen für diese Variablen zugeordnet worden, so werden diese Namen im Dialogfenster **Abfrage der Probedaten** als Feldtitel angezeigt.

Hinweis

Für die Probenidentifikationen **ID1 ... ID8** ist standardmässig als Typ **Text** ausgewählt. Wollen Sie für diese Methodenvariablen Zahlen eingegeben, die für spätere Berechnungen verwendet werden sollen, müssen diese Variablen im **START**-Befehl auf den Typ **Zahl** umgeschaltet werden.

Einmass

ein, [aus]

Ein-/Ausschalten der Abfrage nach dem **Probeneinmass**.

Einheit

ein, [aus]

Ein-/Ausschalten der Abfrage nach der **Probenmasseinheit**.

Meldung

ein, [aus]; Text (unbegrenzt)


Ist diese Option eingeschaltet, erscheint die hier definierte Meldung im Dialogfenster **Abfrage der Probedaten**, in dem die Probedaten beim Metho-

denablauf abgefragt werden. Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verändert werden kann.

Hinweis

Falls in den Sicherheitseinstellungen die Option **Kommentar bei Änderung von Probedaten (live)** eingeschaltet ist, erscheint nach der Dateneingabe das Dialogfenster **Änderungskommentar Probedaten** (siehe Unterfenster Ablauf - Einzelbestimmung - Änderungskommentar für Probedaten), wo eine **Begründung** und ein **Kommentar** für die Änderung eingegeben werden müssen.

REQUEST - Abfrage der Probedaten

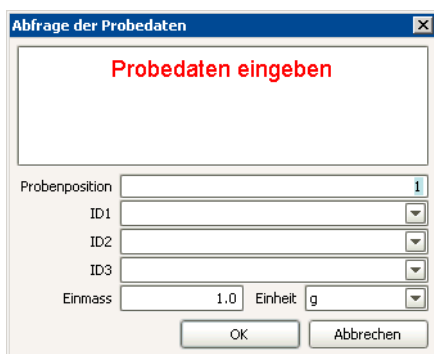

Meldung

Anzeige der im **REQUEST**-Befehl definierten Meldung.

Probenposition

[1] ... 999

Position der Probe auf dem Probenwechslerrack. Diese Nummer kann zum Anfahren der Probenposition mit einem **MOVE**-Befehl mit der **Zielposition** = **Probenposition** verwendet werden.

ID1 ... ID8

-1.0E-99 ... 1.0E+99 (für Typ = Zahl)

100 Zeichen (für Typ = Text)

'JJJJ-MM-TT [hh:mm:ss]' (für Typ = Datum/Zeit)

Probenidentifikationen.

Hinweis

Wenn die Probenidentifikationen beim Start der Methode noch ungültig sind und erst mit dem **REQUEST**-Befehl im Ablauf eingegeben werden, muss für diese Methodenvariablen die Option **Überprüfung beim Start** im **START**-Befehl **ausgeschaltet** werden.

Einmass

[1], 10 Ziffern

Probeneinmass (Einwaage).

Einheit

[g], mg, µg, mL, µL, Stück

Einheit des Probeneinmasses (nur Text).

Hinweis

Probedaten können auch direkt von einer **Waage** oder einem **Barcodeleser** eingelesen werden. Dazu muss im Ablauffenster, in dem die Bestimmung gestartet wird (Einzelbestimmung oder Bestimmungsserie), der Datenimport eingeschaltet und die entsprechenden Geräte definiert sein. Nach dem Datenempfang von diesen Geräten wird das Dialogfenster **Abfrage der Probedaten** automatisch geschlossen.

Hinweis

Falls in den Sicherheitseinstellungen die Option **Kommentar bei Änderung von Probedaten (live)** eingeschaltet ist, erscheint nach der Dateneingabe das Dialogfenster **Änderungskommentar Probedaten** (siehe Unterfenster Ablauf - Einzelbestimmung - Änderungskommentar für Probedaten), wo eine **Begründung** und ein **Kommentar** für die Änderung eingegeben werden müssen.

CALL

Befehl zum **Aufrufen von Spuren**. Wahlweise kann eine Bedingung formuliert werden, die erfüllt sein muss, damit der CALL-Befehl ausgeführt wird.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

CALL		
Aufruf 1		
▶	Aufrufstext	Spurname 1
▶	Aufrufstext	Spurname 2

•
•
•

Es sind maximal 10 Aufrufe pro Befehl möglich.

Parameter

Die Parameter für den Befehl **CALL** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **CALL**

CALL - Eigenschaften

CALL - Aufruf 22

Befehlsname: Aufruf 22

	Aufrufstext	Spurname	Bedingung
1	Spur 1 aufrufen	Spur 1	☐

Neu Eigenschaften Löschen

OK Abbrechen

Befehlsname
25 Zeichen, [Aufruf #]
Name des Befehls.

Aufruftabelle

Alle definierten Aufrufe, die in der Tabelle aufgelistet sind, werden gleichzeitig ausgeführt. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar.

Hinweis

Der **CALL-Befehl** wartet, bis alle aufgerufenen Spuren beendet worden sind oder sich zurückgemeldet haben. Falls nicht auf die Beendigung einer Spur gewartet werden soll, muss die Option **Sofort zurückmelden** im entsprechenden **Spurbefehl** eingeschaltet werden.

Neu

Öffnen des Dialogfensters **Aufruf** zur Eingabe eines neuen Aufrufes.

Hinweis

Es können maximal 10 Aufrufe eingegeben werden.

Eigenschaften

Öffnen des Dialogfensters **Aufruf** zum Bearbeiten des in der Tabelle ausgewählten Aufrufes.

Löschen

Ausgewählten Aufruf löschen.

CALL - Aufruf

Aufrufstext

50 Zeichen, ['leer']

Frei editierbarer Text zur Bezeichnung des Aufrufs, der in der Befehlsdarstellung angezeigt wird.

Spurname

Spurnamen, ['leer']

Auswahl der aufzurufenden Spur. Es werden sämtliche in der Methode vorhandenen Normalspuren (mit Ausnahme der Hauptspur) angezeigt.

Bedingung

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Aufruf nur ausgeführt, wenn die Auswertung der Bedingung das Resultat **1** (= wahr) liefert.

1000 Zeichen, ['leer']

Ausdruck für die Bedingung(en), der nach Drücken auf  oder mittels Doppelklick in das Textfeld mit dem **Formel-Editor** erstellt oder bearbeitet werden kann.

LOOP

Befehl für das **mehrfache Durchführen von Methodenteilen**. Die Schleife kann nach Erfüllen unterschiedlicher Abbruchkriterien beendet werden.


Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:




Ein neu eingefügter Schleifenbefehl hat auf der linken Seite einen Pfeil, der mit der Maus zum gewünschten Befehl in der gleichen Spur gezogen werden kann, um somit eine Schleife zu erzeugen. Je nach dem, ob der Pfeil nach oben oder nach unten gezogen wird, resultieren **zwei unterschiedliche Schleifentypen**:

Repeat-Schleife

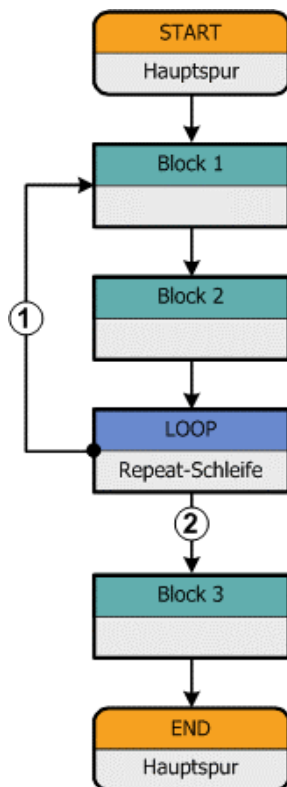

While-Schleife

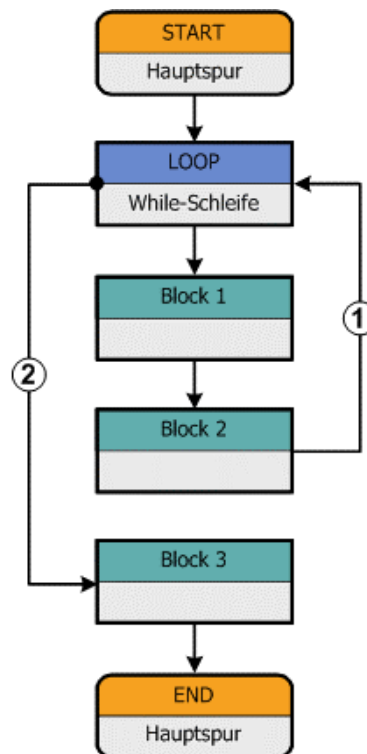

- ① Abbruchkriterium nicht erfüllt
- ② Abbruchkriterium erfüllt

Bei **Repeat-Schleifen** steht der Schleifenbefehl am Ende der Schleife. Ist ein Abbruchkriterium erfüllt (Fall ②), wird der nächste Befehl nach dem Schleifenbefehl ausgeführt. Ist kein Abbruchkriterium erfüllt (Fall ①), so wird die Schleife erneut ausgeführt. Die Schleife wird also in jedem Fall mindestens einmal durchlaufen.

Bei **While-Schleifen** steht der Schleifenbefehl am Beginn der Schleife. Wird der Schleifenpfeil auf einen Befehl unter dem Schleifenbefehl gezogen, wird automatisch vom vorhergehenden Befehl aus ein Pfeil zurück zum Schleifenbefehl erzeugt. Ist ein Abbruchkriterium erfüllt (Fall ②), so wird der nächste Befehl nach der Schleife ausgeführt. Ist kein Abbruchkriterium erfüllt (Fall ①), so wird die Schleife ausgeführt. Bei entsprechend gesetzten Abbruchkriterien ist es also möglich, dass die Schleife nie durchlaufen wird.

Hinweis

Verschachtelte oder sich überschneidende Schleifen sind nicht zulässig.

Parameter

Die Parameter für den Befehl **LOOP** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **LOOP**

LOOP - Eigenschaften

Befehlsname

25 Zeichen, [Schleife #]

Name des Befehls.

Abbruchkriterien

Definition von drei möglichen von Abbruchkriterien. Dasjenige der Abbruchkriterien, welches zuerst erreicht ist, führt zum Abbruch der Schleife.

Maximale Anzahl Durchläufe

[ein], aus

Ein-/Ausschalten des Abbruchkriteriums.

0 ... [1] ... 999

Definition der maximalen Anzahl Durchläufen von Repeat- und While-Schleifen. Ist die maximale Anzahl Durchläufe erreicht, wird die Schleife beim erneuten Aufruf des Schleifenbefehls abgebrochen.

Maximale Ablaufzeit

[ein], aus

Ein-/Ausschalten des Abbruchkriteriums.

0 ... 999.9; [min], s

Definition der maximalen Ablaufzeit. Der Startpunkt für die Ablaufzeit ist der erste Start des Schleifenbefehls, d.h. dass die Ablaufzeit bei While-Schleifen erst nach dem ersten Schleifendurchlauf gestartet wird. Ist die maximale Ablaufzeit erreicht, wird die Schleife beim erneuten Aufruf des Schleifenbefehls abgebrochen.

Hinweis

*Wird die Methode mit **[HOLD]** unterbrochen, wird auch die Ablaufzeit angehalten.*

Bedingung

ein, [aus]

Ein/Ausschalten des Abbruchkriteriums.

1000 Zeichen, ['leer']

Ausdruck für die Bedingung(en), der nach Drücken auf  oder mittels Doppelklick in das Textfeld mit dem **Formel-Editor** erstellt oder bearbeitet werden kann. Ist die Bedingung erfüllt (Auswertung der Formel liefert das Resultat **1** = wahr), wird die Schleife beim erneuten Aufruf des Schleifenbefehls abgebrochen.

WAIT

Befehl zur Unterbrechung des Programmablaufes, um **Meldungen** auszugeben.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:




Parameter

Die Parameter für den Befehl **WAIT** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **WAIT**

WAIT - Eigenschaften

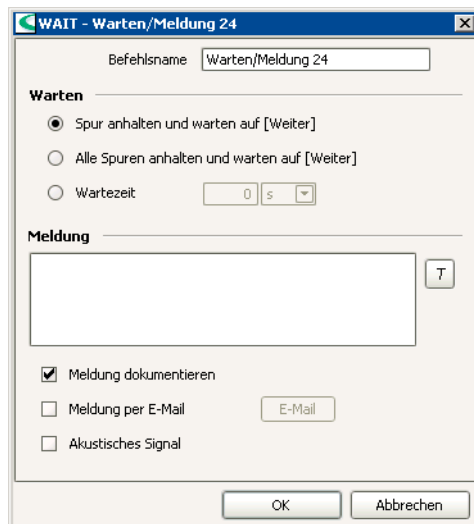

Befehlsname

25 Zeichen, [Warten/Meldung #]

Name des Befehls.

Warten

Spur anhalten und warten auf [Weiter]

[ein], aus

Ist diese Option ausgewählt, wird die Spur, in der sich der WAIT-Befehl befindet, angehalten und eine Meldung angezeigt. Der Methodenablauf kann nur durch Drücken von **[Weiter]** fortgesetzt werden.

Alle Spuren anhalten und warten auf [Weiter]

ein, [aus]

Ist diese Option ausgewählt, werden alle aktiven Spuren angehalten und eine Meldung angezeigt. Der Methodenablauf kann nur durch Drücken von [Weiter] fortgesetzt werden.

Wartezeit

ein, [aus]

0 ... 9999.9; [s], min

Ist diese Option ausgewählt, wird der Methodenablauf nach Ablauf dieser Wartezeit automatisch fortgesetzt. Während der Wartezeit erscheint der unter **Meldung** definierte Meldungstext.

Meldung

Text (unbegrenzt)

Die hier definierte Meldung wird bei angehaltenen Spuren oder während

der Wartezeit angezeigt. Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verändert werden kann. Innerhalb des Textfeldes kann auch der Formeditor aufgerufen werden.

Meldung dokumentieren


ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird die im Textfeld definierte Meldung in der Bestimmung dokumentiert.

Meldung per E-Mail

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird die Meldung an die im Textfeld definierte Meldung an die unter [E-Mail] definierte Adresse gesendet.

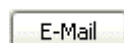

Mit dieser Schaltfläche öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** (siehe *CALC - Resultateigenschaften - E-Mail senden*) für die Definition der E-Mail-Parameter.

Akustisches Signal

ein, [aus]


Ist diese Option eingeschaltet, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

SEQUENCE

Befehl zum Zusammenfassen einer Abfolge von Einzelbefehlen zu einem einzigen Befehl. Dieser Befehl dient nur zur übersichtlicheren Gestaltung von Methoden.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

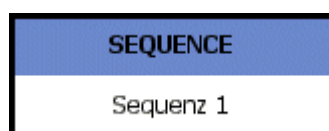

Parameter

Die Parameter für den Befehl **SEQUENCE** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- **SEQUENCE**

SEQUENCE - Eigenschaften



Befehlsname
25 Zeichen, [Sequenz #]
Name des Befehls.

Tabelle

In der nicht editierbaren Tabelle werden die einzelnen Befehle mit **Befehlstyp** und **Befehlsname** angezeigt.

In einem SEQUENCE-Befehl können beliebig viele Befehle eingefügt werden, die in der Befehlstabelle angezeigt werden. Die Tabelle enthält die folgenden Informationen zu den Befehlen:

Befehlstyp
Anzeige des Befehlstyps.

Befehlsname
Anzeige des Befehlsnamens.


Funktionen



Verschieben des ausgewählten Befehls nach oben (Reihenfolge ändern).




Verschieben des ausgewählten Befehls nach unten (Reihenfolge ändern).

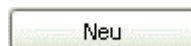

Öffnen des Fensters **Neuer Befehl** für die Auswahl des gewünschten Befehls, der am Ende der Tabelle hinzugefügt werden soll.



Öffnen des Eigenschaftensfensters des ausgewählten Befehls.

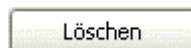

Löschen des ausgewählten Befehls.

Kopieren

Mit diesem kontext-sensitiven Menüpunkt werden die in der Tabelle ausgewählten Befehle in die Zwischenablage kopiert.

Ausschneiden

Mit diesem kontext-sensitiven Menüpunkt werden die in der Tabelle ausgewählten Befehle gelöscht und in die Zwischenablage kopiert.

Einfügen

Mit diesem kontext-sensitiven Menüpunkt werden die in die Zwischenablage kopierten Befehle am Schluss der Tabelle eingefügt.

5.7 Methodenreports

Methodenreports wählen

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei, Drucken (PDF)...** wird das Fenster **Methodenreports drucken (PDF)** geöffnet, in dem der gewünschte Report für die fokussierte Methode und das Ausgabeformat ausgewählt werden kann.



Reportauswahl

Für die Ausgabe eines Methodenreports kann eine der drei folgenden Reports ausgewählt werden:

Methodenablauf

[ein], aus

Ausgabe des Methodenablaufs in grafischem Format.

Methodenparameter

ein, [aus]

Ausgabe des vollständigen Parameterreports inklusive Unterschriften und Methoden-History.

Titrations- und Messparameter

ein, [aus]

Ausgabe des Reports der Parameter von allen Titrations- und Messbefehlen.

Ausrichtung

Hochformat

[ein], aus

Ausgabe im Hochformat.

Querformat

ein, [aus]

Ausgabe im Querformat.

Methodenablauf-Report

Nach der Auswahl des Reports **Methodenablauf** im Fenster **Methodenreports drucken (PDF)** wird ein grafischer Report des Methodenablaufs im PDF-Format erzeugt und im Acrobat Reader geöffnet. Von diesem Programm aus kann der Report auf den gewünschten Drucker ausgegeben oder als PDF-Datei gespeichert werden.

Methodenparameter-Report

Nach der Auswahl des Reports **Methodenparameter** im Fenster **Methodenreports drucken (PDF)** wird ein vollständiger Report aller Methodenparameter inklusive Unterschriften und Methoden-History im PDF-Format erzeugt und im Acrobat Reader

geöffnet. Von diesem Programm aus kann der Report auf den gewünschten Drucker ausgegeben oder als PDF-Datei gespeichert werden.

Titrationen- und Messparameter-Report

Nach der Auswahl des Reports **Titrationen- und Messparameter** im Fenster **Methodenreports drucken (PDF)** wird ein Parameterreport aller Titrations- und Messbefehle im PDF-Format erzeugt und im Acrobat Reader geöffnet. Von diesem Programm aus kann der Report auf den gewünschten Drucker ausgegeben oder als PDF-Datei gespeichert werden.

Kapitel 6 Konfiguration

6.1 Allgemeines

6.1.1 Allgemeines

Definition


Unter **Konfiguration** versteht man in *tiamo* alle methodenübergreifenden Einstellungen für Geräte, Titriermittel/Lösungen, Sensoren, Common Variablen und Rackdaten. Zur Konfiguration gehören auch Sicherheitseinstellungen, Anwenderverwaltung, Programmadministration und Audit Trail.

Organisation

Sämtliche Konfigurationsdaten werden in der **Konfigurationsdatenbank** gespeichert. Bei Local-Server-Systemen (*tiamo light*, *tiamo full*) liegt diese im Programmverzeichnis des Rechners, auf dem das Programm installiert wurde. Bei Client-Server-Systemen (*tiamo multi*) wird die Konfigurationsdatenbank zentral auf dem Server gespeichert und enthält sämtliche Konfigurationsdaten aller Rechner (Clients), die an diesem Server angeschlossen sind.

6.1.2 Oberfläche

Konfigurationssymbol

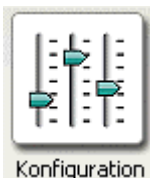

Durch Klicken auf das Konfigurationssymbol in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Konfiguration** geöffnet, gleichzeitig wird das Konfigurationssymbol farbig dargestellt.

Elemente

Die Oberfläche des Programmtteils **Konfiguration** umfasst die folgenden Elemente:

- Konfigurationsspezifische Menüleiste.
- Konfigurationsspezifische Symbolleiste.
- Hauptfenster, in dem bis zu 5 Unterfenster angezeigt werden können.

6.1.3 Menüleiste

Die Menüleiste im Programmteil **Konfiguration** umfasst folgende Hauptmenüpunkte:

- **Datei**
Konfigurationsdaten exportieren, importieren, sichern, wiederherstellen.
- **Ansicht**
Layout ändern, Ansicht laden, Ansicht speichern, Schnellzugriff auf Unterfenster.
- **Extras**
Anwenderverwaltung, Sicherheitseinstellungen, Programmadministration, Audit Trail, Vorlagen, Optionen.
- **Hilfe**
tiamo-Hilfe öffnen, Info zu *tiamo* anzeigen.

Menü Datei

Exportieren...

Exportieren von Konfigurationsdaten.

Importieren...

Importieren von Konfigurationsdaten.

Sichern/Automatisch

Automatisches Sichern von Konfigurationsdaten.

Sichern/Manuell

Manuelles Sichern von Konfigurationsdaten.



Anwender/Abmelden

Anwender abmelden.

Beenden

Programm beenden.

Menü Ansicht



Layout ändern

Layout der geladenen Konfigurationsansicht ändern.



Ansicht laden

Laden einer gespeicherten Konfigurationsansicht.



Ansicht speichern

Speichern der aktuellen Konfigurationsansicht.

Schnellzugriff

Öffnen eines in der aktuellen Konfigurationsansicht nicht enthaltenen Unterfensters.



Symbolleiste

Anzeige der Symbolleiste ein-/ausschalten.

Menü Extras



Manuelle Bedienung

Manuelles Bedienen der angeschlossenen Geräte.



Anwenderverwaltung...

Verwalten von Anwendern und Anwendergruppen mit Zugriffsrechten, Unterschriftsberechtigungen und Optionen.



Sicherheitseinstellungen...

Optionen für Anmeldung, Passwortschutz, Audit Trail und elektronische Unterschrift.

Programmadministration

Allgemeine Einstellungen zu Local/Server- und Client/Server-Einstellungen.



Audit Trail...

Öffnen des Audit Trail.

Vorlagen/Eigene Kalibrierpuffer...

Definition von eigenen Pufferreihen, welche bei der Kalibrierung von pH-Elektroden automatisch erkannt werden.

Vorlagen/Eingangsleitungen...

Erstellen von Vorlagen für das Abfragen von Remote-Leitungen.

Vorlagen/Ausgangsleitungen...

Erstellen von Vorlagen für das Setzen von Remote-Leitungen.

Optionen...

Einstellen von Programmooptionen.

Menü Hilfe



tiamo Hilfe

tiamo-Hilfe öffnen.

Info

Informationen zum Programm und zur Installation anzeigen.

6.1.4 Symbolleiste



Layout ändern

Layout der geladenen Konfigurationsansicht ändern.



Ansicht laden

Laden einer gespeicherten Konfigurationsansicht.



Ansicht speichern

Speichern der aktuellen Konfigurationsansicht.



Anwenderverwaltung...

Verwalten von Anwendern und Anwendergruppen mit Zugriffsrechten, Unterschriftsberechtigungen und Optionen.



Sicherheitseinstellungen...

Optionen für Anmeldung, Passwortschutz, Audit Trail und elektronische Unterschrift.



Audit Trail...

Öffnen des Audit Trail.



Abmelden

Anwender abmelden.



tiamo Hilfe

tiamo-Hilfe öffnen.

6.1.5 Unterfenster

Auswahl

Im Hauptfenster können die folgenden 5 Unterfenster angezeigt werden:

- **Geräte**
Anzeige der automatisch erkannten und manuell hinzugefügten Geräte.
- **Titriermittel/Lösungen**
Anzeige der Daten für automatisch erkannte und manuell hinzugefügte Titriermittel und Hilfslösungen.
- **Sensoren**
Anzeige der Daten für alle definierten Sensoren.
- **Common Variablen**
Anzeige der Daten für alle definierten Common Variablen.
- **Rackdaten**
Anzeige der Daten für alle Metrohm-Probenracks.

Darstellung

Die Unterfenster können durch Ziehen des Trennbalkens zwischen den Fenstern beliebig vergrößert oder verkleinert werden.

Durch Klick auf die Schaltfläche ☐ oben rechts können die Unterfenster maximiert werden, so dass nur noch 1 Unterfenster im Hauptfenster angezeigt wird. Durch erneutes Drücken der Schaltfläche ☐ im maximierten Unterfenster wird wieder zur ursprünglichen Ansicht aller Unterfenster gewechselt.

Über den Menüpunkt **Ansicht, Schnellzugriff...** können diejenigen Unterfenster als Einzelfenster angezeigt werden, welche in der aktuellen Konfigurationsansicht nicht enthalten sind.

6.1.6 Funktionen

Im Programmteil **Konfiguration** können folgende Funktionen ausgeführt werden:

Ansichten

- Layout der Konfigurationsansicht definieren
- Konfigurationsansicht laden
- Konfigurationsansicht speichern
- Konfigurationsansicht umbenennen
- Konfigurationsansicht löschen

Anwenderverwaltung

- Anwendergruppen verwalten
- Zugriffsrechte
- Unterschriften
- Optionen
- Anwender

Sicherheitseinstellungen

- Anmeldung / Passwortschutz
- Audit Trail / Änderungen
- Elektronische Unterschrift
- Standardbegründungen

Programmadministration

- Sicherungsverzeichnisse
- Rechnerkennungen
- Lizenzen

Export/Import von Konfigurationsdaten

- Konfigurationsdaten exportieren
- Konfigurationsdaten importieren

Sichern/Wiederherstellen von Konfigurationsdaten

- Konfigurationsdaten automatisch sichern
- Konfigurationsdaten manuell sichern
- Konfigurationsdaten wiederherstellen

Vorlagen

- Eigene Kalibrierpuffer
- Eingangsleitungen
- Ausgangsleitungen

Optionen

- Allgemeine Programmeigenschaften

6.1.7 Konfigurationsansichten

Definition

Als **Konfigurationsansicht** wird der Inhalt und die Gestaltung des Hauptfensters im Programmteil **Konfiguration** bezeichnet. Zur Konfigurationsansicht gehören folgende Elemente:

- Anzahl, Anordnung, Reihenfolge und Grösse der Unterfenster.
- Darstellung innerhalb der einzelnen Unterfenster, d.h. Spaltenreihenfolge, Spaltenbreite, Sortierung und Filter.

Funktionen

Für Konfigurationsansichten sind folgende Funktionen möglich:

- **Layout ändern**
Anzahl, Anordnung und Reihenfolge der Unterfenster für die aktuelle Konfigurationsansicht definieren.
- **Ansicht speichern**
Aktuelle Konfigurationsansicht speichern.
- **Ansicht laden**
Gespeicherte Konfigurationsansicht laden.
- **Ansicht umbenennen**
Gespeicherte Konfigurationsansicht umbenennen.
- **Ansicht löschen**
Gespeicherte Konfigurationsansicht löschen.

Automatisch speichern

Ist bei den Optionen auf der Registerkarte **Speichern** der Punkt **Einstellungen für Konfiguration** unter **Beim Beenden speichern** eingeschaltet, wird die aktuelle Konfigurationsansicht beim Schliessen von *tiamo* automatisch gespeichert.

Automatisch laden

Standardmässig wird die beim Schliessen von tiamo gespeicherte Konfigurationsansicht beim erneuten Öffnen von *tiamo* automatisch wieder geladen. Als Alternative kann für jede Anwendergruppe eine Standard-Konfigurationsansicht definiert werden, die beim ersten Öffnen des Programnteils Konfiguration automatisch geladen wird.

Hinweis


Beim allerersten Programmstart wird standardmässig eine Konfigurationsansicht mit den 4 Unterfenstern **Gerätetabelle**, **Titriermittel/Lösungen**, **Sensoren** und **Common Variablen** geöffnet.

Export/Import

Konfigurationsansichten können auch exportiert und importiert werden. Damit können Ansichten zwischen verschiedenen Client/Server-Systemen ausgetauscht werden.

Layout ändern

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht, Layout ändern** wird das Dialogfenster **Layout ändern** geöffnet.

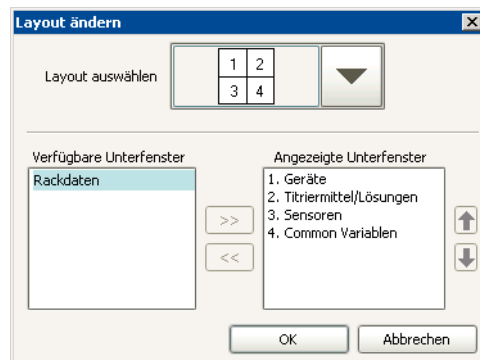

Layout auswählen

Auswahl der möglichen Kombinationen

Auswahl eines grafischen Symbols für die Anzahl und Anordnung der Unterfenster.

Verfügbare Unterfenster

Auswahl der Unterfenster

Anzeige der noch verfügbaren Unterfenster für die Anzeige in der Ansicht.

Angezeigte Unterfenster

Unterfenster

Anzeige der in der Ansicht angezeigten Unterfenster.



Hinzufügen des ausgewählten Unterfensters zur Ansicht.



Entfernen des ausgewählten Unterfensters aus der Ansicht.




Verschieben des ausgewählten Unterfensters nach oben (Reihenfolge ändern).



Verschieben des ausgewählten Unterfensters nach unten (Reihenfolge ändern).

Ansicht speichern

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht, Ansicht speichern** wird das Dialogfenster **Ansicht speichern** geöffnet.

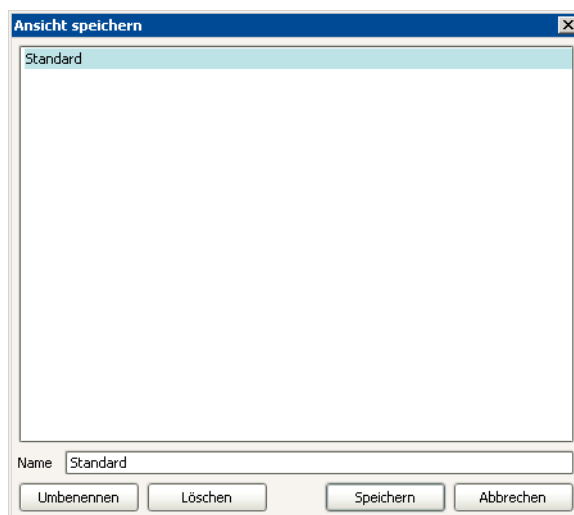

Name

Name, unter dem die Ansicht gespeichert werden soll.

Umbenennen

Ausgewählte Ansicht umbenennen.

Löschen


Ausgewählte Ansicht löschen.

Speichern

Ansicht unter dem angegebenen Namen speichern. Die gespeicherten Ansichten sind bei Client/Server-Systemen global gültig und verfügbar.

Ansicht laden

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht, Ansicht laden** wird das Dialogfenster **Ansicht laden** geöffnet.

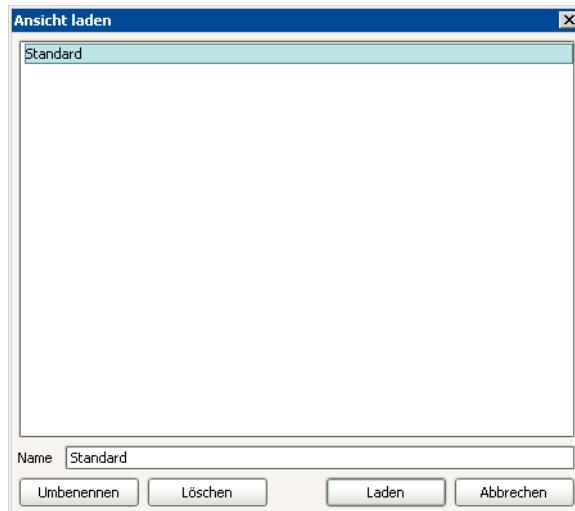

Name

Name der Ansicht, die geladen werden soll.

Umbenennen

Ausgewählte Ansicht umbenennen.

Löschen


Ausgewählte Ansicht löschen.

Laden

Ausgewählte Ansicht laden.

Ansicht umbenennen


Um eine Ansicht umzubenennen, muss entweder das Dialogfenster **Ansicht laden** oder **Ansicht speichern** geöffnet und die Schaltfläche  gedrückt werden. Anschliessend öffnet sich das Fenster **Ansicht umbenennen**.

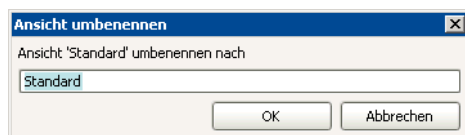

Ansicht umbenennen nach 50 Zeichen, ['Alter Name']

Eingabe eines neuen Namens für die Ansicht.

Ansicht löschen

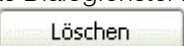Um eine Ansicht zu löschen, muss entweder das Dialogfenster **Ansicht laden** oder **Ansicht speichern** geöffnet und die Schaltfläche  gedrückt werden. Anschliessend muss der Löschvorgang bestätigt werden.

6.2 Administration

6.2.1 Sicherheitseinstellungen

Übersicht

Im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** können Parameter für Anmeldung, Passwortschutz, Audit Trail und elektronische Unterschriften konfiguriert werden. Sie dienen in erster Linie dazu, das Arbeiten gemäss den Sicherheitsanforderungen der FDA-Richtlinie 21 CFR 11 sicherzustellen.

Hinweis

*Die Version tiamo light kann nicht FDA-konform konfiguriert werden. Mit Ausnahme des Parameters **Anwendername erforderlich** auf der Registerkarte **Anmeldung/Passwortschutz** sind alle Optionen inaktiv.*

Die Sicherheitseinstellungen sind bei Client/Server-Systemen global für alle angeschlossenen Clients gültig.

Sicherheitseinstellungen können exportiert und importiert werden. Damit können diese Einstellungen zwischen verschiedenen Client/Server-Systemen ausgetauscht werden.

Registerkarten

Die Sicherheitseinstellungen werden auf den folgenden 4 Registerkarten konfiguriert:

- **Anmeldung/Passwortschutz**
Einstellungen zur Anmeldung und zum Passwortschutz
- **Audit Trail/Änderungen**
Ein-/Ausschalten des Audit Trail und Kommentare beim Ändern von Methoden, Bestimmungen oder Probedaten
- **Unterschriften**
Optionen für elektronische Unterschriften
- **Standardbegründungen**
Definition von Begründungen für das Unterschreiben und Ändern von Methoden, Bestimmungen und Probedaten.

Anmeldung/Passwortschutz

Auf der Registerkarte **Anmeldung/Passwortschutz** wird definiert, ob sich der Anwender mit Name oder mit Name und Passwort anmelden muss und wie das Passwort überwacht und aufgebaut sein muss.

Einstellungen gemäss 21 CFR 11

Setzen

Setzt die Parameter auf Standardeinstellungen für FDA-konformes Arbeiten.

Anmeldung

Anwendername erforderlich

ein, [aus]; FDA-Default: **ein**

Ist diese Option **eingeschaltet**, so erscheint bei jedem Programmstart das Anmeldefenster, in dem der Anwender seinen Anwendernamen eingeben muss. Ist diese Option **ausgeschaltet**, so wird keine Anmeldung verlangt und als Anwendername wird der unter Windows angemeldete Anwender übernommen. Sämtliche nachfolgenden Parameter sind in diesem Fall inaktiv.

Passwort erforderlich

ein, [aus]; FDA-Default: **ein**

Ist diese Option **eingeschaltet**, so erscheint bei jedem Programmstart das Anmeldefenster, in dem der Anwender neben seinem Anwendernamen auch ein Passwort eingeben muss. Ist diese Option **ausgeschaltet**, so sind sämtliche nachfolgenden Parameter inaktiv.

Passwortüberwachung durch tiamo

ein, [aus]; FDA-Default: **ein**

Ist diese Option **eingeschaltet**, so wird das Passwort gemäss den nachfolgenden Parametern durch *tiamo* überwacht.

Passwortüberwachung durch Windows

ein, [aus]; FDA-Default: **aus**

Ist diese Option **eingeschaltet**, so wird das Passwort gemäss den in Windows festgelegten Parametern überwacht. Die Parameter für den Passwortschutz sind in diesem Fall inaktiv.

Hinweis

Bei Windows 2000 ist für die Passwortüberwachung durch Windows folgendes Vorgehen nötig:

1. Start/Ausführen "secpol.msc".
2. Unter "Lokale Richtlinien/Zuweisen von Benutzerrechten" die Richtlinie "Einsetzen als Teil des Betriebssystems" für alle gewünschten Benutzergruppen einschalten.
3. Rechner neu starten.

Maximale Anzahl Fehlversuche

ein, [aus]; FDA-Default: **aus**

2 ... [3] ... 5; FDA-Default: **3**

Ist diese Option **eingeschaltet**, so wird ein Anwender in den Status **inaktiv** gesetzt, sobald die hier definierte Anzahl Fehlversuche beim Anmelden überschritten wurde. Ein Anwender mit Status **inaktiv** kann *tiamo* nicht mehr starten. Der Zähler für die Fehlversuche wird bei jedem Neustart von *tiamo* für alle Anwender auf Null gesetzt.

Meldung per E-Mail

ein, [aus]; FDA-Default: **aus**

Ist diese Option **eingeschaltet**, so wird eine E-Mail an die unter **<E-Mail>** definierte Adresse geschickt, sobald die definierte Anzahl Fehlversuche beim Anmelden überschritten wurde.

E-Mail

Mit dieser Schaltfläche öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** (siehe *Sicherheitseinstellungen - E-Mail senden*) für die Definition der E-Mail-Parameter.

Abmeldung

Erneute Anmeldung nur für gleichen Anwender

ein, [aus]; FDA-Default: **aus**

Ist diese Option **eingeschaltet**, so ist beim manuellen Abmelden ein erneutes Anmelden nur für den gleichen Anwender möglich. Anwender mit Administratorrechten können sich aber in jedem Fall anmelden. Falls diese Option eingeschaltet wird, ist die folgende Option automatisch eingeschaltet und inaktiv.

Kein Bearbeiten von Arbeitsplätzen im Status 'BUSY'

ein, [aus]; FDA-Default: **aus**

Ist diese Option **eingeschaltet**, so kann nach dem manuellen Abmelden eines Anwenders ein neu angemeldeter Anwender auf den noch geöffneten Arbeitsplätzen mit laufenden Bestimmungen weder Daten editieren noch Aktionen auslösen. Diese Arbeitsplätze werden erst wieder verfügbar, wenn alle Bestimmungen beendet sind. Für die laufenden Bestimmungen gilt immer noch der alte Anwendername (Audit-Trail-Einträge, Speichern, Exportieren, etc.). Eine Ausnahme ist der Notstopp, der für alle laufenden Bestimmungen und Serien immer möglich ist, auch wenn kein Anwender angemeldet ist.

Ist diese Option **ausgeschaltet**, so hat der neu angemeldete Anwender für die geöffneten Arbeitsplätze alle Rechte, die er auf Grund seiner Gruppenzugehörigkeit (siehe Anwenderverwaltung) hat. Für die laufenden Bestimmungen gilt ab sofort der neue Anwendername (Audit-Trail-Einträge, Speichern, Exportieren, etc.).

Automatische Abmeldung nach

ein, [aus]; FDA-Default: **aus**

1 ... [10] ... 60 min; FDA-Default: **10 min**

Ist diese Option **eingeschaltet**, so wird der Anwender automatisch abgemeldet, wenn innerhalb dieser Zeit keine Bedienfunktion via Tastatur oder Maus ausgeführt wird. Nach dieser automatischen Abmeldung kann sich nur der gleiche Anwender oder ein Anwender mit Administratorrechten wieder neu anmelden.

Hinweis

Der sofortige Abbruch aller laufenden Bestimmungen auf allen aktiven Arbeitsplätzen mit dem Notstopp-Button bleibt auch nach einer automatische Abmeldung möglich.

Passwortschutz

Eindeutiges Passwort

ein, [aus]; FDA-Default: ein

Ist diese Option **eingeschaltet**, so wird sichergestellt, dass ein Anwender ein Passwort nur einmal verwendet werden kann.

Sonderzeichen notwendig

ein, [aus]; FDA-Default: aus

Ist diese Option **eingeschaltet**, so wird sichergestellt, dass das Passwort mindestens ein Sonderzeichen (@, #, ~ etc.) enthalten muss.

Minimale Passwortlänge

ein, [aus]; FDA-Default: ein

1 ... [6] ... 10 Zeichen; FDA-Default: 6 Zeichen

Ist diese Option **eingeschaltet**, so wird sichergestellt, dass das Passwort mindestens die angegebene Anzahl Zeichen enthalten muss.

Gültigkeitsdauer

ein, [aus]; FDA-Default: ein

1 ... [365] ... 999 Tage; FDA-Default: 365 Tage

Ist diese Option **eingeschaltet**, so wird sichergestellt, dass ein Anwender vor Ablauf der Gültigkeitsdauer ein neues Passwort eingeben muss. Meldet sich ein Anwender an, dessen Passwort innerhalb von weniger als 10 Tagen abläuft, so erscheint eine entsprechende Meldung. Gibt der Anwender kein neues Passwort ein, wird er nach Ablauf der Gültigkeitsdauer automatisch in den Status **inaktiv** gesetzt und das Starten von *tiamo* ist für ihn nicht mehr möglich.

E-Mail senden

The screenshot shows a standard Windows-style dialog box titled "E-Mail senden". It has a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- Mail an:** A text input field for the recipient's email address.
- Betreff:** A text input field for the subject line.
- Meldung:** A large text area for the message content, with a small "T" icon (likely for text formatting) on the right side.
- Konfiguration:** A section containing five text input fields: "Anwender", "Passwort", "Mail von", "SMTP-Server", and "POP3-Server".
- Buttons:** At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Mail an

150 Zeichen

E-Mail-Adresse des Empfängers.

Betreff

150 Zeichen

Titel zur Beschreibung der Meldung.

Meldung

Meldung

Text (unbegrenzt)

Die hier definierte Meldung wird beim Überschreiten der maximal zulässigen Anzahl Fehlversuche beim Anmelden als E-Mail verschickt. Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verändert werden kann.

Konfiguration

Anwender

150 Zeichen

Name des Anwenders für den Zugang zum Mail-Server. Dieser Name muss nicht mit dem Windows-Anwendernamen übereinstimmen.

Passwort

150 Zeichen

Passwort für den Zugang zum Mail-Server. Dieses Passwort muss nicht mit dem Windows-Passwort übereinstimmen.

Mail von

150 Zeichen

E-Mail-Adresse des Absenders.

SMTP-Server

150 Zeichen

Adresse des SMTP-Mail-Servers.


POP3-Server

150 Zeichen

Adresse des POP3-Mail-Servers.

Audit Trail/Änderungen

Auf der Registerkarte **Audit Trail/Änderungen** wird die Aufzeichnung des Audit Trails ein- und ausgeschaltet. Hier kann auch definiert werden, ob bei Änderungen von Methoden, Bestimmungen oder Probedaten eine Änderungsbegründung und ein Änderungskommentar verlangt wird oder nicht.

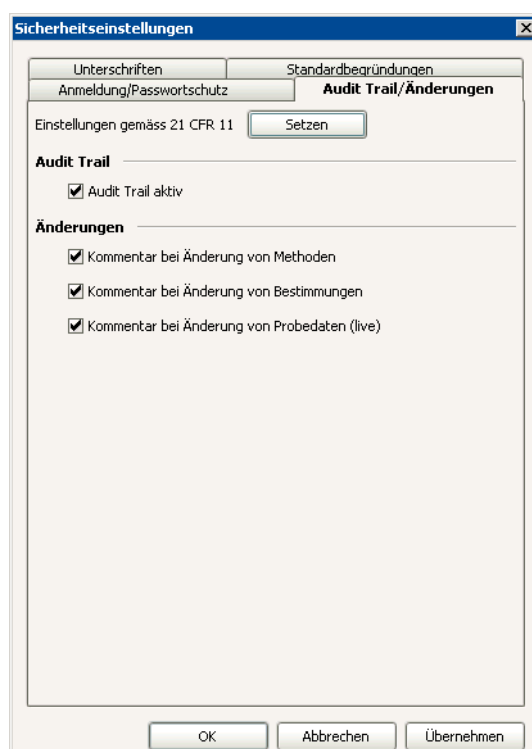

Einstellungen gemäss 21 CFR 11

Setzen

Setzt die Parameter auf Standardeinstellungen für FDA-konformes Arbeiten.

Audit Trail

Audit Trail aktiv

ein, [aus]; FDA-Default: **ein**

Ist diese Option **eingeschaltet**, so werden alle Programmaktionen automatisch aufgezeichnet, welche als Audit-Trail-Aktionen definiert sind.

Änderungen

Kommentar bei Änderung von Methoden

ein, [aus]; FDA-Default: **ein**

Ist diese Option **eingeschaltet**, so muss bei jeder Änderung einer Methode eine Änderungsbegründung und ein Änderungskommentar eingegeben werden, die in der Methode gespeichert und in der Methoden-History angezeigt werden. Begründung und Kommentar werden auch im Audit Trail aufgezeichnet.

Kommentar bei Änderung von Bestimmungen

ein, [aus]; FDA-Default: **ein**

Ist diese Option **eingeschaltet**, so muss bei jeder Änderung einer Bestimmung eine Änderungsbegründung und ein Änderungskommentar eingegeben werden, die in der Bestimmung gespeichert und in der Datenbank im Unterfenster **Informationen** auf der Registerkarte **Bestimmung** angezeigt werden. Begründung und Kommentar werden auch im Audit Trail aufgezeichnet.


Kommentar bei Änderung von Probedaten (live)

ein, [aus]; FDA-Default: **ein**


Ist diese Option **eingeschaltet**, so muss bei jeder Änderung einer Bestimmung eine Änderungsbegründung und ein Änderungskommentar eingegeben werden, die in der Bestimmung gespeichert und in der Datenbank im Unterfenster **Informationen** auf der Registerkarte **Probe** angezeigt werden. Begründung und Kommentar werden auch im Audit Trail aufgezeichnet.

Unterschriften

Auf der Registerkarte **Unterschriften** können Parameter zur elektronischen Unterschrift konfiguriert werden.

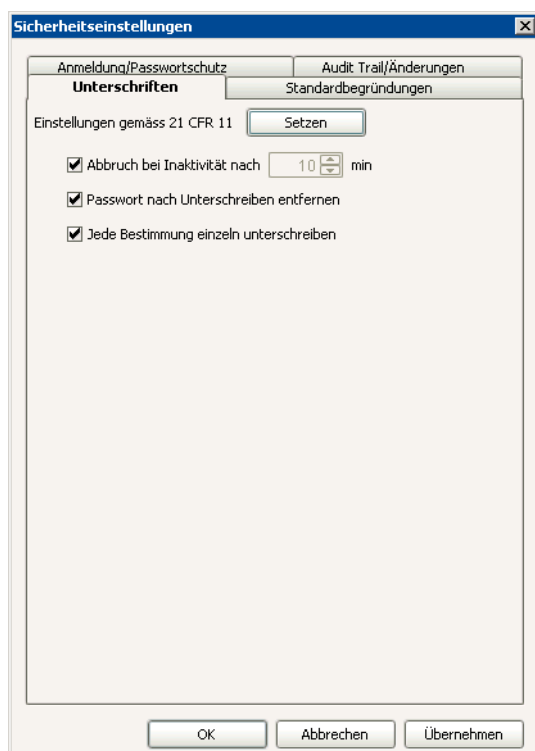

Einstellungen gemäß 21 CFR 11

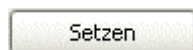

Setzt die Parameter auf Standardeinstellungen für FDA-konformes Arbeiten.

Abbruch bei Inaktivität nach

ein, [aus]; FDA-Default: ein

1...[10]...60 min; FDA-Default: 10 min

Ist diese Option **eingeschaltet**, so wird das Dialogfenster zum Unterschreiben nach Ablauf des gesetzten Zeitlimits automatisch geschlossen.

Passwort nach Unterschreiben entfernen

ein, [aus]; FDA-Default: ein

Ist diese Option **eingeschaltet**, so muss das Passwort nach jedem Unterschreiben neu eingegeben werden.

Jede Bestimmung einzeln unterschreiben

ein, [aus]; FDA-Default: ein

Ist diese Option **eingeschaltet**, so muss jede der in der Bestimmungsübersicht ausgewählten Bestimmungen einzeln unterschrieben werden.

Standardbegründungen

Auf der Registerkarte **Standardbegründungen** werden die Begründungen definiert, welche beim Unterschreiben von Methoden und Bestimmungen oder beim Ändern von Methoden, Bestimmungen und Probedaten eingegeben werden müssen.



Kategorie

[**Unterschrift Stufe 1**], **Unterschrift Stufe 2**, **Änderungen Methode**, **Änderungen Bestimmung**, **Änderungen Probedaten**

Auswahl der Kategorie, für die Begründungen definiert werden sollen.

Begründungen

50 Zeichen

Anzeige der für die ausgewählte Kategorie definierten Begründungen.



Text nach oben verschieben (Reihenfolge ändern).




Text nach unten verschieben (Reihenfolge ändern).



Hinzufügen einer neuen Begründung.



Bearbeiten der ausgewählten Begründung.

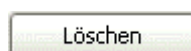

Löschen der ausgewählten Begründung.

6.2.2 Anwenderverwaltung

Übersicht


Im Dialogfenster **Anwenderverwaltung** können **Anwendergruppen** und deren **Anwender** verwaltet werden. Für jede Anwendergruppe können Zugriffsrechte für Menüpunkte und Funktionen, Unterschriftsberechtigungen und Standardansichten für die einzelnen Programnteile definiert werden. Die Anwenderverwaltung ist bei Client/Server-Systemen global für alle angeschlossenen Clients gültig (zentrale Anwenderverwaltung).

Bei der Installation werden automatisch die drei Anwendergruppen **Administratoren** (mit dem Anwender **Admin1**), **Anwender** und **Entfernte Anwender** (jeweils ohne Anwender) angelegt. Alle Gruppen können umbenannt werden, die Gruppe **Administratoren** ist aber als einzige nicht löschtbar.

Die Daten der Anwenderverwaltung können exportiert und importiert werden. Damit können diese Daten zwischen verschiedenen Client/Server-Systemen ausgetauscht werden.

Gliederung

Das Dialogfenster **Anwenderverwaltung** ist in zwei Teile geteilt, deren Grösse mit der Maus verändert werden kann. Im linken Teil werden die **Anwendergruppen** mit den zugeordneten **Anwendern** baumartig aufgelistet, im rechten Teil werden Details zu den selektierten Elementen angezeigt.

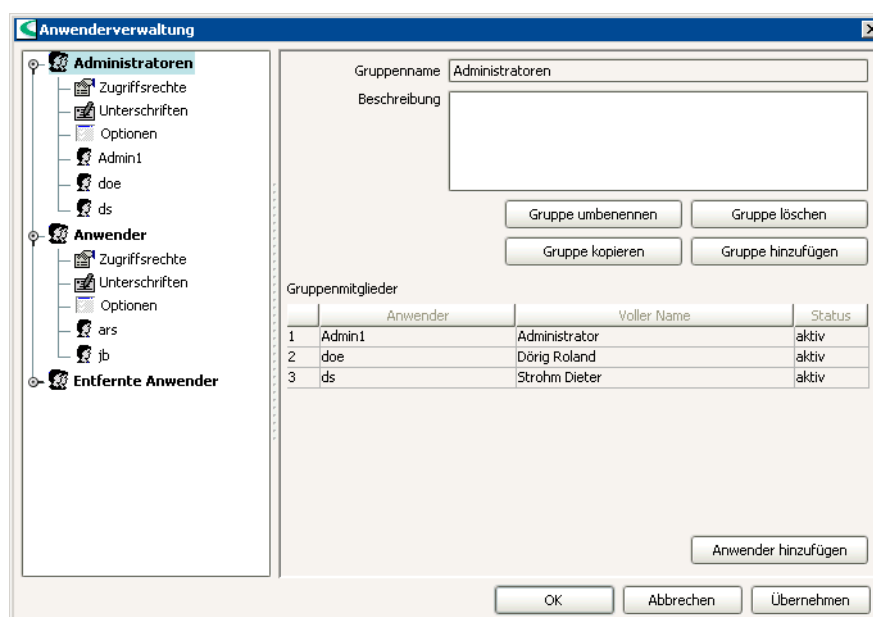

Jede Anwendergruppe mit Ausnahme der Gruppe **Entfernte Anwender** enthält folgende Elemente:

- **Zugriffsrechte**
Vergabe der Zugriffsberechtigungen auf die vier Programnteile und deren Menüleisten.
- **Unterschriften**
Vergabe der Unterschriftsberechtigungen für Methoden und Bestimmungen.
- **Optionen**
Definition der Ansicht für die einzelnen Programnteile.
- **Anwender**
Details zum Anwender.

Funktionen

Im Dialogfenster **Anwenderverwaltung** können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- Anwendergruppen hinzufügen
- Anwendergruppen kopieren
- Anwendergruppen umbenennen
- Anwendergruppen löschen
- Zugriffsrechte für Anwendergruppen festlegen
- Unterschriftsberechtigungen für Anwendergruppen festlegen
- Optionen für Anwendergruppen festlegen
- Anwender hinzufügen
- Startpasswort für neuen Anwender setzen
- Anwender inaktiv setzen
- Anwender aktiv setzen
- Anwender entfernen

Anwendergruppen

Gruppeninformationen

Wird im linken Teil des Dialogfensters **Anwenderverwaltung** eine Anwendergruppe ausgewählt, so werden im rechten Teil Details zu dieser Anwendergruppe sowie eine Tabelle mit allen dazugehörenden Mitgliedern angezeigt.

Gruppendaten

Anwenderverwaltung

Gruppenname: Administratoren

Beschreibung:

Gruppe umbenennen Gruppe löschen

Gruppe kopieren Gruppe hinzufügen

Gruppenmitglieder

	Anwender	Voller Name	Status
1	Admin1	Administrator	aktiv
2	doe	Dörig Roland	aktiv
3	ds	Strohm Dieter	aktiv

Anwender hinzufügen

OK Abbrechen Übernehmen

Gruppenname

Anzeige des Namens der Anwendergruppe.

Beschreibung

256 Zeichen

Beschreibung der Anwendergruppe.

Gruppe umbenennen

Ausgewählte Anwendergruppe umbenennen.

Gruppe löschen

Ausgewählte Anwendergruppe löschen.

Gruppe kopieren

Ausgewählte Anwendergruppe kopieren.

Gruppe hinzufügen

Neue Anwendergruppe hinzufügen.

Gruppenmitglieder

Die Tabelle der Gruppenmitglieder enthält Informationen zu allen Mitgliedern der ausgewählten Anwendergruppe. Die Tabelle ist nicht editier- und sortierbar.

Anwender

Kurznamen des Anwenders.

Voller Name

Voller Name des Anwenders.

Status

Aktueller Anwenderstatus.

aktiv

Der Anwender kann sich normal anmelden.

inaktiv


Der Anwender kann sich nicht mehr anmelden. Er muss vom Administrator zuerst wieder in den Status **aktiv** gesetzt und mit einem neuen Startpasswort versehen werden.

Anwender hinzufügen

Neuen Anwender zur Anwendergruppe hinzufügen.

Zugriffsrechte

Ist im linken Teil des Dialogfensters **Anwenderverwaltung** das Element **Zugriffsrechte** einer Anwendergruppe markiert, so werden im rechten Teilfenster die Zugriffsrechte dieser Gruppe für Programmteile, Menüpunkte und Funktionen baumartig angezeigt und können dort verändert werden. Wird ein Punkt deaktiviert, werden automatisch alle dazugehörigen Unterpunkte auch deaktiviert. Wird ein Unterpunkt, z.B. das Menü "Extras" in der Konfiguration deaktiviert, wird das Kästchen der Konfiguration grau eingefärbt. Gesperrte Funktionen werden für die betreffenden Anwender inaktiv, d.h. grau angezeigt.

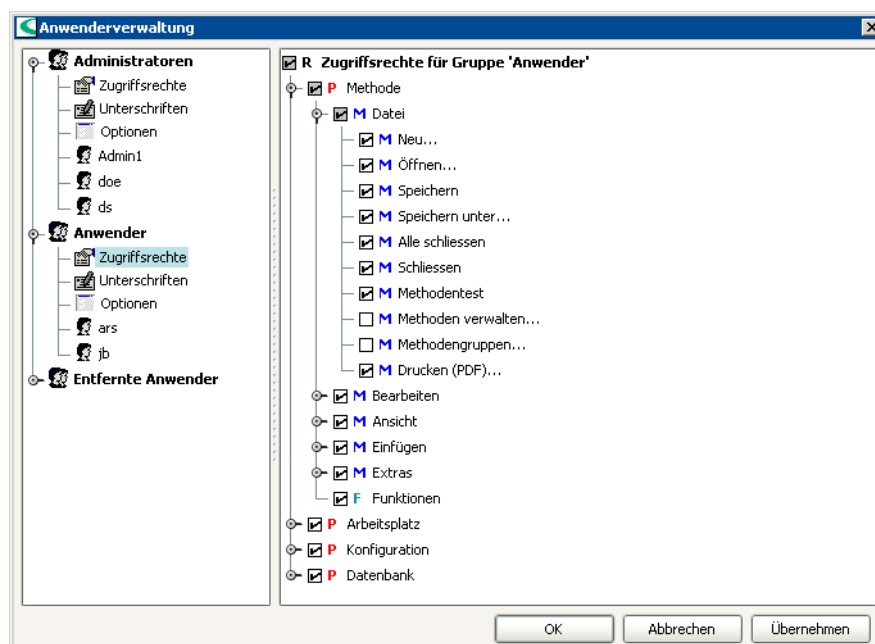

Bedeutung der Symbole:

	Ansicht erweitern	P	Programmteil
	Ansicht reduzieren	M	Menüpunkt
	Voller Zugriff auf Funktion(en)	F	Funktion
	Beschränkter Zugriff auf Funktion(en)		
	Kein Zugriff auf Funktion(en)		

Hinweis


Bei der Gruppe **Administratoren** sind standardmässig alle Zugriffsrechte eingeschaltet und können nicht geändert werden.

Unterschriften

Ist im linken Teil des Dialogfensters **Anwenderverwaltung** das Element **Unterschriften** einer Anwendergruppe markiert, so werden im rechten Teilfenster die Berechtigungen dieser Gruppe angezeigt und können dort geändert werden.

Hinweis

Für die Version *tiamo light* können diese Berechtigungen nicht editiert werden, da keine Unterschriften möglich sind.

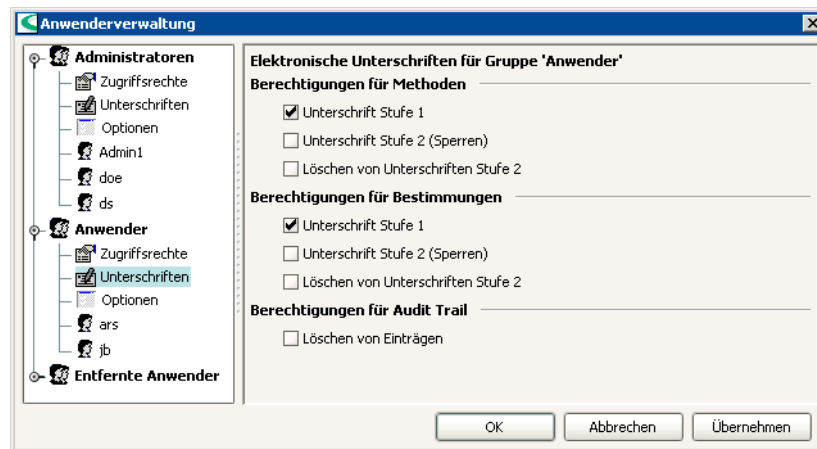

Berechtigungen für Methoden

Unterschrift Stufe 1

[aus], ein

Ist diese Option **eingeschaltet**, so können Anwender aus dieser Anwendergruppe Methoden auf Stufe 1 elektronisch unterschreiben.

Unterschrift Stufe 2 (Sperren)

[aus], ein

Ist diese Option **eingeschaltet**, so können Anwender aus dieser Anwendergruppe Methoden auf Stufe 2 elektronisch unterschreiben und damit gleichzeitig für weitere Änderungen sperren.

Löschen von Unterschriften Stufe 2

[aus], ein

Ist diese Option **eingeschaltet**, so können Anwender aus dieser Anwendergruppe sämtliche Unterschriften auf Stufe 2 löschen. Damit kann die Methode wieder bearbeitet werden.

Berechtigungen für Bestimmungen

Unterschrift Stufe 1

[aus], ein

Ist diese Option **eingeschaltet**, so können Anwender aus dieser Anwendergruppe Bestimmungen auf Stufe 1 elektronisch unterschreiben.

Unterschrift Stufe 2 (Sperren)

[aus], ein

Ist diese Option **eingeschaltet**, so können Anwender aus dieser Anwendergruppe Bestimmungen auf Stufe 2 elektronisch unterschreiben und damit gleichzeitig für weitere Änderungen sperren.

Löschen von Unterschriften Stufe 2

[aus], ein

Ist diese Option **eingeschaltet**, so können Anwender aus dieser Anwendergruppe sämtliche Unterschriften auf Stufe 2 löschen. Damit kann die Bestimmung wieder bearbeitet werden.

Berechtigungen für Audit Trail

Löschen von Einträgen

[aus], ein


Ist diese Option **eingeschaltet**, so können Anwender aus dieser Anwendergruppe das Löschen von Audit-Trail-Einträgen mit ihrer Unterschrift bestätigen.

Hinweis

Bei der Gruppe **Administratoren** sind standardmässig alle Unterschriftsberechtigungen eingeschaltet, sie können aber ausgeschaltet werden.

Optionen

Ist im linken Teil des Dialogfensters **Anwenderverwaltung** das Element **Optionen** einer Anwendergruppe markiert, so werden im rechten Teilfenster Optionen für diese Gruppe angezeigt und können dort geändert werden.

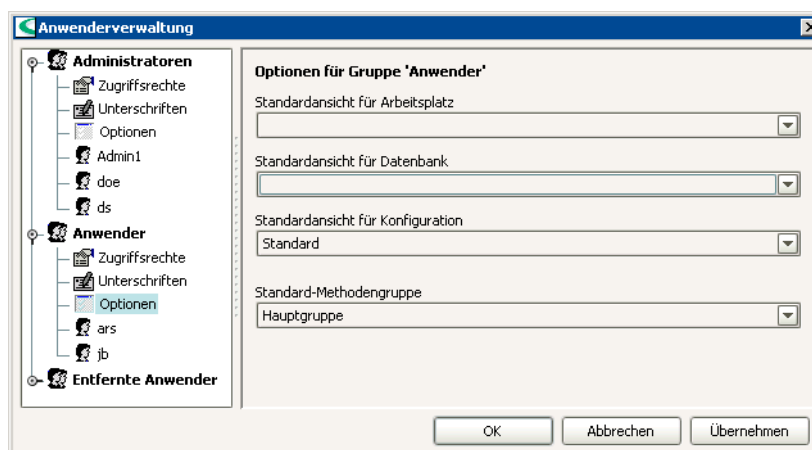

Standardansicht für Arbeitsplatz

Auswahl der definierten Arbeitsplatz-Ansichten

Wahl der Ansicht, die nach dem Anmelden des Anwenders standardmässig im Programmteil **Arbeitsplatz** geöffnet wird.

Standardansicht für Datenbank

Auswahl der definierten Datenbank-Ansichten

Wahl der Ansicht, die nach dem Anmelden des Anwenders standardmässig im Programmteil **Datenbank** geöffnet wird.

Standardansicht für Konfiguration

Auswahl der definierten Konfigurations-Ansichten


Wahl der Ansicht, die nach dem Anmelden des Anwenders standardmässig im Programmteil **Konfiguration** geöffnet wird.

Standard-Methodengruppe

Wahl der standardmässig geöffneten Methodengruppe für das Öffnen und Speichern von Methoden.

Anwendergruppe hinzufügen

Um eine neue Anwendergruppe mit Standardeinstellungen hinzuzufügen, muss eine bestehende Gruppe ausgewählt und entweder der kontextsensitive Menüpunkt **Gruppe hinzufügen** oder die Schaltfläche  gedrückt werden. Danach wird das Dialogfenster **Gruppe hinzufügen** geöffnet.

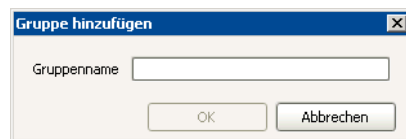

Gruppenname

24 Zeichen


Name der neuen Gruppe.

Mit **[OK]** wird unter diesem Namen eine neue Gruppe mit Standardeinstellungen angelegt, die keine Anwender enthält. Das Feld **Beschreibung** und die Tabelle der Gruppenmitglieder sind leer.

Anwendergruppe kopieren

Um die eine Anwendergruppe zu kopieren und unter einem neuen Namen abzuspeichern, muss eine bestehende Gruppe ausgewählt und entweder der kontextsensitive Menüpunkt **Gruppe kopieren** oder die Schaltfläche

 gedrückt werden. Danach wird das Dialogfenster **Gruppe kopieren** geöffnet.

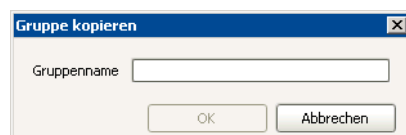

Gruppenname


24 Zeichen

Name der neuen Gruppe.

Mit **[OK]** wird unter diesem Namen eine neue Gruppe mit den gleichen Eigenschaften (Zugriffsrechte, Unterschriftsberechtigungen etc.) wie die ausgewählte Gruppe angelegt, die aber keine Anwender enthält. Das Feld **Beschreibung** und die Tabelle der Gruppenmitglieder sind leer.

Anwendergruppe umbenennen

Um eine ausgewählte Anwendergruppe umzubenennen, muss entweder der kontextsensitive Menüpunkt **Gruppe umbenennen** oder die Schaltfläche

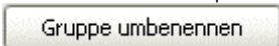 gedrückt werden. Danach wird das Dialogfenster **Gruppe umbenennen** geöffnet.



Gruppenname

24 Zeichen

Eingabe des neuen Gruppennamens.

Anwendergruppe löschen


Um eine ausgewählte Anwendergruppe zu löschen, muss entweder der kontext-sensitive Menüpunkt **Gruppe löschen** oder die Schaltfläche  gedrückt werden. Danach wird die Gruppe gelöscht.

Hinweis


Das Löschen von Anwendergruppen ist nur möglich, wenn keine Anwender mehr in der Gruppe vorhanden sind.

Anwender hinzufügen

Um einen neuen Anwender hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:

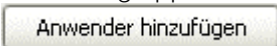- Anwendergruppe auswählen und den kontextsensitiven Menüpunkt **Anwender hinzufügen** wählen.
- Anwendergruppe auswählen und die Schaltfläche  drücken.

In beiden Fällen wird danach das Dialogfenster **Anwender hinzufügen** geöffnet.

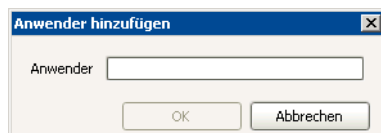

Anwender

24 Zeichen

Kurzname des neuen Anwenders, mit dem er sich beim Programmstart anmelden muss. Nach der Eingabe des Namens muss ein Startpasswort vergeben werden, worauf der neue Anwender in die Anwenderliste eingetragen wird.

Anwender

Anwenderinformationen

Wird im linken Teil des Dialogfensters **Anwenderverwaltung** ein Anwender in einer Anwendergruppe ausgewählt, so werden im rechten Teil Details zum Anwender angezeigt.

Anwender

Anzeige des Kurznamens des Anwenders, der beim Anmelden im Feld **Anwender** eingegeben werden muss. Dieser Name wird beim Anlegen eines neuen Anwenders definiert und kann danach nicht mehr geändert werden.

Voller Name

256 Zeichen

Ausführlicher Name des Anwenders.

Status

Anzeige des aktuellen Status des Anwenders. Nur Anwender der Gruppe **Administratoren** können den Status ändern.

aktiv

Anwender im Status **aktiv** können sich normal anmelden. Eine Ausnahme bildet die erste Anmeldung nach dem Wechsel des Status von **inaktiv** oder **entfernt** auf **aktiv**. In diesem Fall muss ein Startpasswort vergeben werden, mit dem sich dieser Anwender neu anmelden kann.

inaktiv

Anwender im Status **inaktiv** können sich nicht mehr anmelden. Sie werden automatisch in diesen Status gesetzt, sobald die in den Sicherheitseinstellungen definierte Anzahl Fehlversuche beim Anmelden überschritten wurde.

entfernt

Anwender im Status **entfernt** können sich nicht mehr anmelden. Wird der Status eines Anwenders von **aktiv** oder **inaktiv** auf **entfernt** gesetzt, wird der Anwender automatisch in die Gruppe **Entfernte Anwender** verschoben. Wird ein entfernter Anwender wieder auf den Status **aktiv** oder **inaktiv** gesetzt, erscheint ein Dialogfenster zur Auswahl der Gruppe, welcher der Anwender zugeordnet werden soll.

Startpasswort

Mit 6 *-Zeichen wird das unsichtbare Startpasswort angezeigt, welches beim erstmaligen Anmelden eines neuen Anwenders oder nach dem Statuswechsel von **inaktiv** oder **entfernt** auf **aktiv** vom Anwender eingegeben werden muss. Der Administrator muss beim Hinzufügen eines neuen Anwenders oder beim Statuswechsel auf **aktiv** ein neues Startpasswort vergeben. Hat der Anwender sich mit dem Startpasswort angemeldet und anschließend ein neues Passwort eingegeben, wird das Startpasswort wieder gelöscht.

Startpasswort setzen

Öffnen des Dialogfensters **Startpasswort**. Diese Schaltfläche ist nur aktiv bei Anwendern mit Status **aktiv**. Hat ein Anwender sein Passwort vergessen, kann der Administrator hier ein neues Startpasswort vergeben.

Anwendergruppe

Auswahl der definierten Anwendergruppen

Aktuelle Anwendergruppe. Der Administrator kann die Gruppenzugehörigkeit des Anwenders ändern. Der Anwender wird automatisch in die neue Gruppe verschoben. Ein Anwender kann auch mit Drag&Drop in eine neue Gruppe verschoben werden.

Bemerkungen

Möglichkeit für zusätzliche Informationen zum Anwender (z.B. Funktion, Adresse).


Anwender hinzufügen

Um einen neuen Anwender hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:

- Anwendergruppe auswählen und den kontextsensitiven Menüpunkt **Anwender hinzufügen** wählen.
- Anwendergruppe auswählen und die Schaltfläche

 drücken.

In beiden Fällen wird danach das Dialogfenster **Anwender hinzufügen** geöffnet.

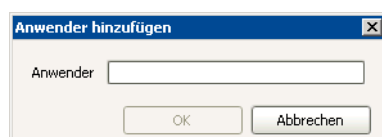

Anwender


24 Zeichen

Kurzname des neuen Anwenders, mit dem er sich beim Programmstart anmelden muss. Nach der Eingabe des Namens muss ein Startpasswort vergeben werden, worauf der neue Anwender in die Anwenderliste eingetragen wird.

Startpasswort setzen



Mit dieser Schaltfläche im Dialogfenster **Anwenderverwaltung** kann für den ausgewählten Anwender ein Startpasswort vergeben werden. Sie ist nur aktiv für neu angelegte Anwender oder für solche, die wieder neu in den Status aktiv gesetzt wurden. Es öffnet sich das Dialogfenster **Startpasswort**:

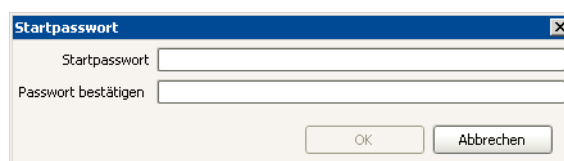

Startpasswort

25 Zeichen

Eingabe eines Startpasswortes. Für das Startpasswort werden die Passwortoptionen nicht angewendet.

Passwort bestätigen

25 Zeichen

Bestätigung des Startpasswortes.

6.2.3 Programmadministration

Übersicht

Unter **Extras, Programmadministration** können Sicherungsverzeichnisse und Lizenzen verwaltet werden.

Registerkarten

Die Parameter für die Programmadministration werden auf den folgenden 3 Registerkarten eingestellt:

- **Sicherungsverzeichnisse**
Liste der definierten Sicherungsverzeichnisse.
- **Rechnerkennungen**
Liste der Computer, auf denen *tiamo* installiert ist.
- **Lizenzen**
Liste der installierten Lizenzen mit Anzahl Clients. Diese Registerkarte wird nur auf dem Server einer Client/Server-Installation angezeigt.

Sicherungsverzeichnisse

Sicherungsverzeichnisse

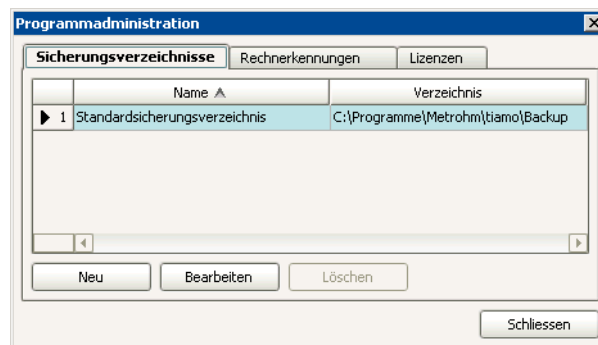


Tabelle mit den definierten Sicherungsverzeichnissen. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Das Verzeichnis **Standardsicherungsverzeichnis** wird bei der Installation angelegt.

Hinweis

Die folgenden Schaltflächen sind nur aktiv, wenn *tiamo* auf dem Server läuft, für die einzelnen Clients sind sie inaktiv.

Neu

Neues Sicherungsverzeichnis hinzufügen.

Bearbeiten

Ausgewähltes Sicherungsverzeichnis bearbeiten.


Löschen

Ausgewähltes Sicherungsverzeichnis löschen.


Hinweis

Das **Standardsicherungsverzeichnis** kann nicht gelöscht werden.

Neues Sicherungsverzeichnis erstellen

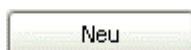

Das Drücken dieser Schaltfläche auf der Registerkarte **Sicherungsverzeichnisse** im Dialogfenster **Programmadministration** wird das Dialogfenster **Neues Sicherungsverzeichnis** geöffnet.

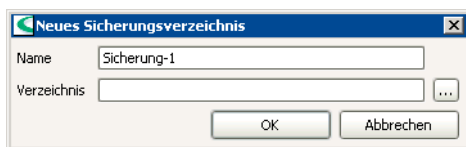

Name

50 Zeichen, [Sicherung-#]

Name für das Sicherungsverzeichnis.

Verzeichnis

1000 Zeichen

Eingabe oder Auswahl (mit ) des Pfades für das Sicherungsverzeichnis.


Hinweis

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte beim Sichern im **Sicherungsname** das Datum der Sicherung manuell hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.

Sicherungsverzeichnis bearbeiten



Mit dieser Schaltfläche auf der Registerkarte **Sicherungsverzeichnisse** im Dialogfenster **Programmadministration** wird das Dialogfenster **Sicherungsverzeichnis bearbeiten** geöffnet.

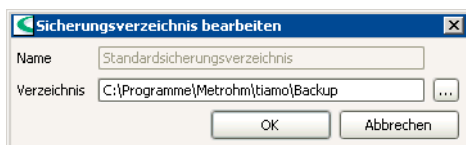

Name

50 Zeichen, [Sicherung-#]

Name für das Sicherungsverzeichnis.

Hinweis

Das bei der Installation erstellte **Standardsicherungsverzeichnis** kann nicht umbenannt werden.

Verzeichnis

1000 Zeichen

Eingabe oder Auswahl (mit ) des Pfades für das Sicherungsverzeichnis.

Hinweis

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte beim Sichern im **Sicherungsname** das Datum der Sicherung manuell hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.

Rechnerkennungen

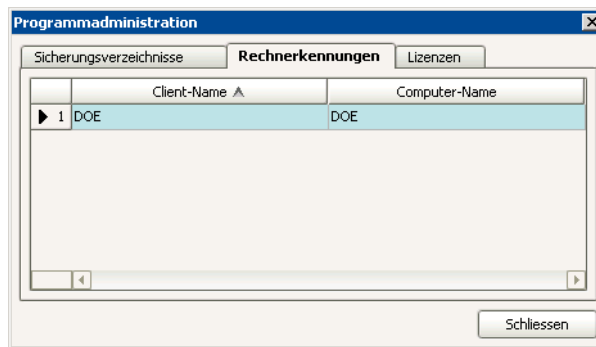


Tabelle mit den Identifikationen der Computer, auf denen *tiamo* installiert ist. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Client-Name

Anzeige des Namens für den Client, der bei der Client/Server-Installation eingegeben wurde.

Computer-Name

Anzeige des Namens des Computers.

Lizenzen

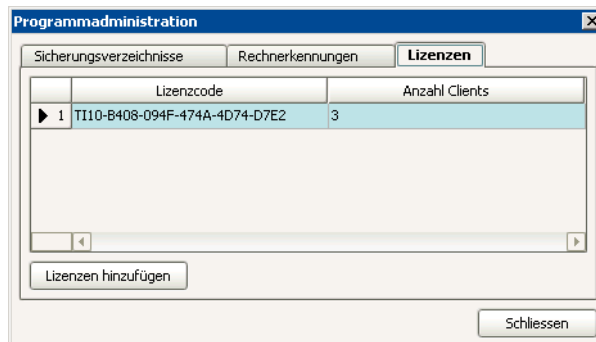


Tabelle mit den Lizenzen, die auf dem Server (bei *tiamo multi*) oder Local Server (bei *tiamo light* und *tiamo full*) installiert sind. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Hinweis

Diese Registerkarte ist bei Client/Server-Systemen nur auf dem Server sichtbar.

Lizenzcode

Anzeige des eingegebenen Lizenzcodes.

Anzahl Lizenzen

Anzeige der Anzahl Clients, die mit dem Lizenzcode freigeschaltet sind.

Lizenzen hinzufügen

Neue, zusätzliche Lizenzen hinzufügen. Es öffnet sich das Dialogfenster **Lizenzen hinzufügen**.



6.3 Konfigurationsdaten

6.3.1 Exportieren/Importieren

Konfigurationsdaten exportieren



Mit **Datei, Exportieren...** wird das Dialogfenster **Konfigurationsdaten exportieren** geöffnet, in dem die folgenden Teile der Konfigurationsdatenbank für den Export ausgewählt werden können:

Geräte

[ein], aus

Konfigurationsdaten für Geräte exportieren.

Titrimittel/Lösungen

[ein], aus

Konfigurationsdaten für Titrimittel und Lösungen exportieren.

Sensoren

[ein], aus

Konfigurationsdaten für Sensoren exportieren.

Common Variablen

[ein], aus

Konfigurationsdaten für Common Variablen exportieren.

Rackdaten

[ein], aus

Konfigurationsdaten für Probenwechsleracks exportieren.

Pufferdaten

[ein], aus

Konfigurationsdaten für eigene Puffer exportieren.

Konfigurations-Ansichten

[ein], aus

Gespeicherte Konfigurationsansichten exportieren.

Arbeitsplatz-Ansichten

[ein], aus

Gespeicherte Arbeitsplatzansichten exportieren.

Datenbank-Ansichten

[ein], aus

Gespeicherte Datenbankansichten exportieren.

Reportvorlagen

[ein], aus

Gespeicherte Reportvorlagen exportieren.

Resultatvorlagen

[ein], aus

Gespeicherte Resultatvorlagen exportieren.

Sicherheitseinstellungen


[ein], aus

Sicherheitseinstellungen exportieren.

Anwenderverwaltung


[ein], aus

Anwenderverwaltung exportieren.

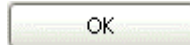

Das Dialogfenster **Speichern** zum Speichern von Daten wird geöffnet, in dem Name und Verzeichnis für die Exportdatei eingegeben werden müssen. Anschliessend werden die ausgewählten Konfigurationsdaten in einer Datei mit der Erweiterung **.mcfg** gespeichert.

Konfigurationsdaten importieren

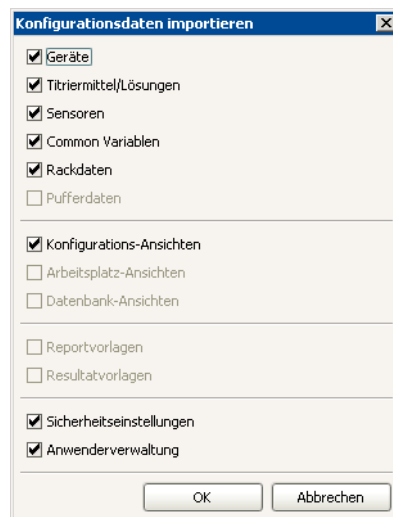

Mit **Datei, Importieren...** wird nach der Wahl der zu importierenden Datei ***.mcfg** das Dialogfenster **Konfigurationsdaten importieren** geöffnet, in dem die in der Exportdatei vorhandenen Teile der Konfigurationsdatenbank für den Import ausgewählt werden können:

Hinweis

Nicht in der Exportdatei vorhandene Daten können nicht ausgewählt werden.

Geräte

[ein], aus

Konfigurationsdaten für Geräte importieren.

Titrimittel/Lösungen

[ein], aus

Konfigurationsdaten für Titrimittel und Lösungen importieren.

Sensoren

[ein], aus

Konfigurationsdaten für Sensoren importieren.

Common Variablen

[ein], aus

Konfigurationsdaten für Common Variablen importieren.

Rackdaten

[ein], aus

Konfigurationsdaten für Probenwechserracks importieren.

Pufferdaten

[ein], aus

Konfigurationsdaten für eigene Puffer importieren.

Konfigurations-Ansichten

[ein], aus

Gespeicherte Konfigurationsansichten importieren.

Arbeitsplatz-Ansichten

[ein], aus

Gespeicherte Arbeitsplatzansichten importieren.

Datenbank-Ansichten

[ein], aus

Gespeicherte Datenbankansichten importieren.

Reportvorlagen

[ein], aus

Gespeicherte Reportvorlagen importieren.

Resultatvorlagen

[ein], aus

Gespeicherte Resultatvorlagen importieren.

Sicherheitseinstellungen

[ein], aus

Sicherheitseinstellungen importieren.

Anwenderverwaltung

[ein], aus

Anwenderverwaltung importieren.




Das ausgewählten Daten werden importiert.

6.3.2 Sichern/Wiederherstellen

Konfigurationsdaten automatisch sichern

Mit **Datei, Sichern, Automatisch** wird das Dialogfenster **Konfigurationsdaten automatisch sichern** geöffnet:

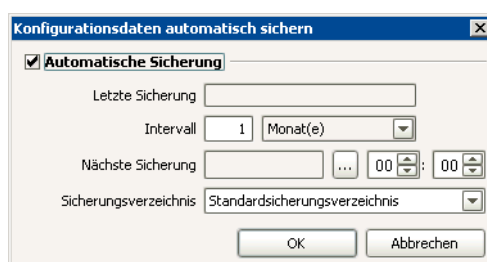

Automatisch sichern

ein, [aus]

Ist diese Option **eingeschaltet** ist, wird die Konfigurationsdatenbank automatisch im gewünschten Zeitintervall in das definierte Sicherungsverzeichnis gesichert. Dabei wird die gesamte Konfigurationsdatenbank (inklusive Methodengruppen und Methoden) gesichert.

Ist diese Option **ausgeschaltet**, können die nachfolgenden Parameter nicht editiert werden.

Letzte Sicherung

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Sicherung der Konfigurationsdaten.

Intervall

[1 Monat], 1 ... 999 Tag(e), Woche(n), Monat(e), Jahr(e)

Eingabe des Zeitintervalls bis zur nächsten automatischen Sicherung. Bei jeder automatischen oder manuellen Sicherung wird das hier eingegebene Intervall zum Datum von **Letzte Sicherung** zuaddiert und in das Feld **Nächste Sicherung** eingetragen.

Nächste Sicherung

Datum, [Letzte Sicherung + 1 Monat]

Datum mit Uhrzeit, an dem die nächste Sicherung durchgeführt werden soll.


Mit  öffnet sich das Fenster **Nächste Sicherung** zur Auswahl des Datums (siehe Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen).

Sicherungsverzeichnis

Auswahl eines vordefinierten Sicherungsverzeichnisses (siehe Konfiguration - Administration - Programmadministration - Sicherungsverzeichnisse).

Konfigurationsdaten manuell sichern

Mit **Datei, Sichern, Manuell** wird das Dialogfenster **Konfigurationsdaten manuell sichern** geöffnet:

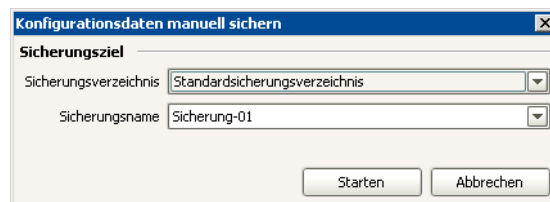

Sicherungsziel

Sicherungsverzeichnis

Auswahl eines vordefinierten Sicherungsverzeichnisses (siehe Konfiguration - Administration - Programmadministration - Sicherungsverzeichnisse).

Sicherungsname

50 Zeichen, [Sicherung-##]

Auswahl eines bereits vorhandenen oder Eingabe eines neuen Namens für die Sicherungsdatei. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei ausgewählt, wird diese überschrieben.

Hinweis

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte im **Sicherungsname** das Datum der Sicherung hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.

Starten

Manuelle Sicherung der gesamten Konfigurationsdatenbank (inklusive Methodengruppen und Methoden) starten.

Konfigurationsdaten wiederherstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine manuell oder automatisch gesicherte Konfigurationsdatenbank wiederherzustellen:

1 - tiamo beenden

- *tiamo light, tiamo full*
Beenden Sie tiamo.
- *tiamo multi*
Stellen Sie sicher, dass *tiamo* auf allen am Server angeschlossenen Clients und auf diesem selber beendet wird.

2 - Wiederherstellungsprogramm starten

- *tiamo light, tiamo full*
Starten Sie die Datei **ConfigRestore.exe** im Programmverzeichnis **...\tiamo\bin**.
- *tiamo multi*
Starten Sie die Datei **ConfigRestore.exe** im Programmverzeichnis **...\tiamo\bin** auf dem Server.

3 - Sicherungsdatei auswählen und Wiederherstellen starten

Es wird das Dialogfenster **Konfigurationsdaten wiederherstellen** geöffnet:



Sicherungsverzeichnis

Auswahl der Sicherungsverzeichnisse, [Standardsicherungsverzeichnis]

Auswahl eines in der Programmadministration vordefinierten Verzeichnisses, in dem sich die gesicherte Konfigurationsdatenbank befindet.

Sicherungsname

Auswahl der Sicherungsdateien

Auswahl einer Sicherungsdatei.

Sicherungsdatum

Anzeige des Zeitpunkts des Sicherung der Konfigurationsdatenbank. Befindet sich die Sicherungsdatei auf einem Netzlaufwerk, ist diese Information nicht verfügbar.

Datenbankname

Anzeige des Namens der Konfigurationsdatenbank. Befindet sich die Sicherungsdatei auf einem Netzlaufwerk, ist diese Information nicht verfügbar.

Grösse

Anzeige der Grösse der Konfigurationsdatenbank in KB.

Speichern unter

Anzeige des Namens, unter dem die Konfigurationsdatenbank wiederhergestellt wird.



Wiederherstellung der Konfigurationsdatenbank starten. Nach dem Start erscheint ein Fortschrittsbalken im Fenster. Ist die Sicherung abgeschlossen, wird das Dialogfenster automatisch geschlossen.

6.3.3 Vorlagen

Eigene Kalibrierpuffer

Mit dem Menüpunkt **Extras, Vorlagen, Eigene Kalibrierpuffer** wird das Dialogfenster **Eigene Kalibrierpuffer** geöffnet, in dem 5 eigene Kalibrierpuffer für die pH-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung definiert werden können. Diese Pufferreihe ist global gültig und kann als Puffertyp **Eigene** im Befehl **CAL LOOP pH** ausgewählt werden. Das Dialogfenster besteht aus 5 identischen Registerkarten für die 5 Puffer.

Temperatur [°C]	pH-Wert
0	aus
5	aus
10	aus
15	aus
20	aus
25	aus
30	aus

Puffertabelle

In der Puffertabelle werden die für den Kalibrierpuffer in 5 °C-Schritten definierten pH-Werte angezeigt. Die Tabelle ist weder editierbar noch sortierbar.

Bearbeiten

Es öffnet sich das Dialogfenster **pH-Wert ändern** (siehe unten).

Alle löschen

Alle pH-Werte des ausgewählten Puffers werden auf **aus** gesetzt.

pH-Werte ändern

Im Dialogfenster **pH-Wert ändern** können die pH-Werte für den in der Puffertabelle ausgewählten Puffer bearbeitet werden.

Temperatur

0 ... 95 °C

Auswahl der Temperatur, für die der pH-Wert geändert werden soll.

pH-Wert

-20.000 ... 20.000, [aus]


pH-Wert des Puffers für die ausgewählte Temperatur.

Hinweis

Geben Sie für eigene Kalibrierpuffer die pH-Werte für denjenigen Temperaturbereich ein, in dem Sie später Ihre pH-Kalibrierung und pH-Messung durchführen werden. Falls Sie pH-Werte bei einzelnen Temperaturen nicht kennen, werden diese durch lineare Interpolation automatisch berechnet.


Vorlagen für Eingangsleitungen

Mit dem Menüpunkt **Extras, Vorlagen, Eingangsleitungen** wird das Dialogfenster **Vorlagen für Eingangsleitungen** geöffnet, in dem clientspezifische Bitmuster für die Abfrage von Remote-Eingangssignalen definiert werden können, die beim Befehl **SCAN** und in der manuellen Bedienung ausgewählt werden können.

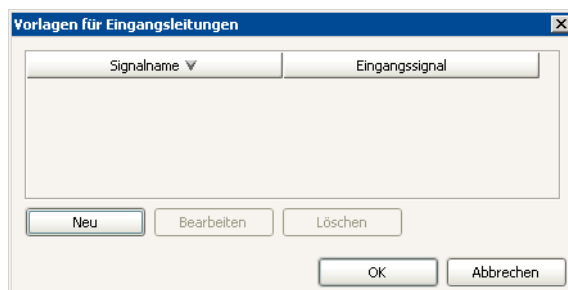

Vorlagentabelle

Die Tabelle mit den definierten Vorlagen ist nicht editierbar, sie kann jedoch durch einen Klick auf den Spaltentitel nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

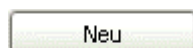

Erstellen einer neuen Vorlage (siehe unten).




Bearbeiten der ausgewählten Vorlage (siehe unten).



Löschen der ausgewählten Vorlage.

Vorlage neu erstellen oder bearbeiten

Mit **[Neu]** oder **[Bearbeiten]** öffnet sich das Dialogfenster **Neue Vorlage** bzw. **Vorlage bearbeiten** für die Eingabe einer neuen Vorlage oder zum Bearbeiten einer bestehenden Vorlage.

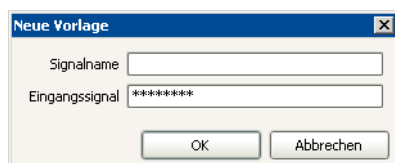

Signalname

25 Zeichen

Name der Vorlage für das Eingangssignal.

Eingangssignal

Bitmuster aus 8 Zeichen (0, 1, *), [*****]

Eingabe des Bitmusters für das Eingangssignal aus genau 8 Zeichen. Eingegeben werden können die Zeichen

- 0** = Leitung inaktiv,
- 1** = Leitung aktiv und
- *** = beliebiger Leitungszustand.

Die Eingangsleitungen und Bits werden dabei von rechts nach links nummeriert:

Input	7	6	5	4	3	2	1	0
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0


Beispiel: *****1 erwartet eine aktive Input-Leitung 0 (1 = gesetzt). Diese Leitung wird z.B. von einem Titrino gesetzt, nachdem eine Titration beendet worden ist und der Titrino wieder ein Start-Signal entgegennehmen kann.

Hinweis

Eingangsleitungen, die nicht interessieren oder bei denen kein definierter Zustand vorausgesagt werden kann, sollten mit einem Stern *maskiert werden.

Vorlagen für Ausgangsleitungen

Mit dem Menüpunkt **Extras, Vorlagen, Ausgangsleitungen** wird das Dialogfenster **Vorlagen für Ausgangsleitungen** geöffnet, in dem clientspezifische Bitmuster für das Setzen von Remote-Ausgangssignalen definiert werden können, die beim Befehl **CTRL** und in der manuellen Bedienung ausgewählt werden können.

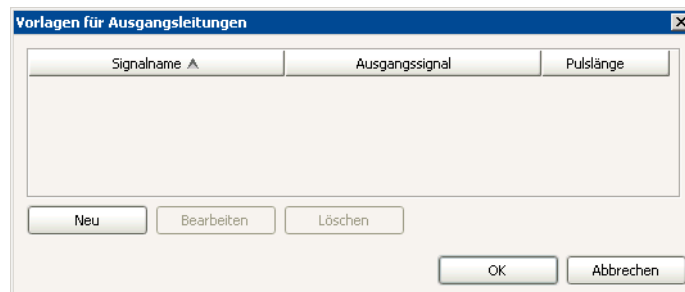

Vorlagentabelle

Die Tabelle mit den definierten Vorlagen ist nicht editierbar, sie kann jedoch durch einen Klick auf den Spaltentitel nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.



Erstellen einer neuen Vorlage (siehe unten).




Bearbeiten der ausgewählten Vorlage (siehe unten).



Löschen der ausgewählten Vorlage.

Vorlage neu erstellen oder bearbeiten

Mit **<Neu>** oder **<Bearbeiten>** öffnet sich das Dialogfenster **Neue Vorlage** bzw. **Vorlage bearbeiten** für die Eingabe einer neuen Vorlage oder zum Bearbeiten einer bestehenden Vorlage.

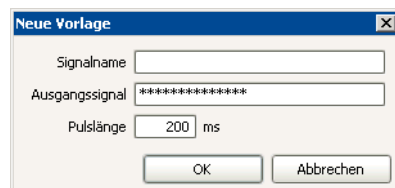

Signalname

25 Zeichen

Name der Vorlage für das Eingangssignal.

Ausgangssignal

Bitmuster aus genau 14 Zeichen (0, 1, *, p), [*****]

Eingabe des Bitmusters für das Ausgangssignal aus genau 14 Zeichen.

Eingegeben werden können die Zeichen

0 = Leitung inaktiv,

1 = Leitung aktiv,

***** = beliebiger Leitungszustand und

p = Puls setzen

Die Ausgangsleitungen und Bits werden dabei von rechts nach links nummeriert:

Output	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Bit	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Beispiel: *******1*** setzt die Output-Leitung 1 auf aktiv (= gesetzt), was z. B. bei einem angeschlossenen Titrino einen Stop-Befehl bewirken würde. *******0*** setzt die Leitung auf inaktiv.

Hinweis

*Es empfiehlt sich, die nicht relevanten Ausgangsleitungen mit einem Stern * zu maskieren, um diese Leitungszustände nicht zu verändern.*

Pulslänge

100 ... [200] ... 1000 ms

Dauer des Pulses, der gesendet wird.

Beispiele für Dosimat 765

Parameter	Bitmuster	Funktion
Start Dos1	***** p *****	Startet Dosimat 1 (Titrino via "activate")
Start Dos2	***** p *****	Startet Dosimat 2 (")
Start Dos*	***** p p *****	Startet Dosimat 1 und 2 (")

6.3.4 Optionen

Unter **Extras, Optionen** können allgemeine Programmeigenschaften auf den folgenden 3 Registerkarten eingestellt werden:

- **Allgemein**
Wahl der Dialogsprache und Ein-/Ausschalten des Notstopp-Buttons.
- **Speichern**
Speichereinstellungen beim Beenden von *tiamo*.
- **PDF**
Einstellungen für pdf-Dateien

Allgemein



Dialogsprache

Dialogsprache

Deutsch, [English]

Auswahl der Dialogsprache.


Hinweis

Damit die geänderte Einstellung wirksam wird, muss *tiamo* neu gestartet werden.

Notstopp-Knopf

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Notstopp-Knopf in allen Programnteilen angezeigt.

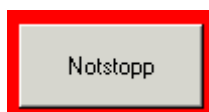


Dieser Knopf kann mit gedrückter linker Maustaste an einen beliebigen Ort verschoben werden und wird auf dem Bildschirm sowohl innerhalb des *tiamo*-Programmfensters als auch ausserhalb auf der Windows-Oberfläche immer zuoberst angezeigt. Ein Mausklick auf diesen Knopf bewirkt einen sofortigen Stopp aller laufenden Bestimmungen auf allen aktiven Arbeitsplätzen. Der Notstopp ist auch wirksam, wenn kein Anwender angemeldet ist, z.B. wenn der Anwender automatisch abgemeldet wurde (siehe Anmeldung/Passwortschutz).

Hinweis

Bei einem Notstopp werden sämtliche Befehle und Spuren auf allen Arbeitsplätzen gestoppt. Gerätefunktionen, die mit einem Befehl eingeschaltet wurden (z.B. Pumpen, Ventile, Rührer) bleiben aber eingeschaltet. Um diese ebenfalls auszuschalten, muss in der Exitspur mit der Bedingung **SV.STO = 1** eine Spur aufgerufen werden, welche die Befehle zum Ausschalten der gewünschten Gerätefunktionen enthält.

Speichern

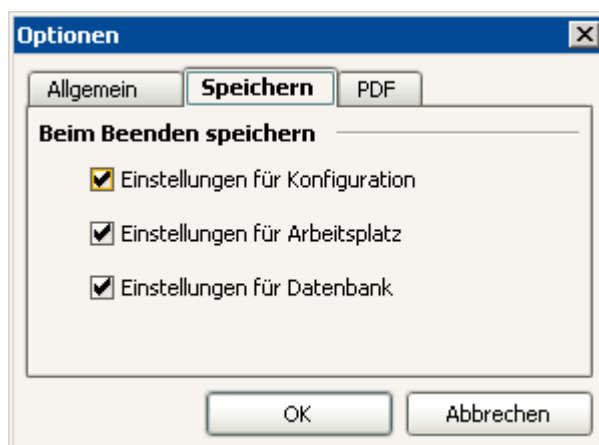

Beim Beenden speichern

Hier kann definiert werden, welche Einstellungen beim Beenden von *tiamo* gespeichert werden sollen. Ist die Option **eingeschaltet**, wird beim Beenden von *tiamo* die aktuelle Ansicht mit ihren Einstellungen automatisch gespeichert. Ist die Option **ausgeschaltet**, werden allfällige Ansichtsänderungen nicht gespeichert und beim nächsten Programmstart wird wieder die ursprüngliche, manuell gespeicherte Ansicht geladen.

Einstellungen für Konfiguration

ein, [aus]

Speichern der Konfigurationsansicht beim Beenden ein-/ausschalten.

Einstellungen für Arbeitsplatz

ein, [aus]


Speichern der Arbeitsplatzansicht beim Beenden ein-/ausschalten.

Einstellungen für Datenbank

ein, [aus]

Speichern der Datenbankansicht beim Beenden ein-/ausschalten.

PDF

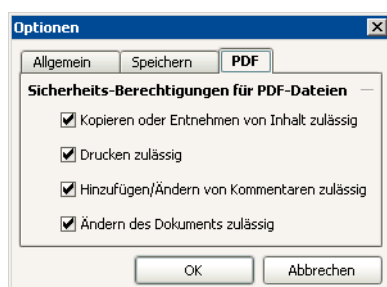

Sicherheits-Berechtigungen für PDF-Dateien

Kopieren oder Entnehmen von Inhalt zulässig

[ein], aus

Ist diese Option **ausgeschaltet**, kann aus der PDF-Datei Inhalt weder kopiert noch entnommen werden.

Drucken zulässig

[ein], aus

Ist diese Option **ausgeschaltet**, kann die PDF-Datei nicht gedruckt werden.

Hinzufügen/Ändern von Kommentaren zulässig
[ein], aus

Ist diese Option **ausgeschaltet**, können Kommentare und Formularfelder weder hinzugefügt noch geändert werden.

Ändern des Dokuments zulässig
[ein], aus

Ist diese Option **ausgeschaltet**, können an der PDF-Datei keine Änderungen vorgenommen werden.

6.4 Audit Trail

6.4.1 Allgemeines

Allgemeines

Definition

Mit dem Begriff **Audit Trail** wird das FDA-konforme Protokollieren aller Anwenderaktionen bezeichnet, mit denen in *tiamo* Daten erzeugt, verändert oder gelöscht werden. Jede dieser Aktionen wird mit Datum, Zeit und dem Namen des angemeldeten Anwenders als Zeile in der Audit-Trail-Tabelle gespeichert.

Organisation

Sämtliche Audit-Trail-Daten werden in der **Konfigurationsdatenbank** gespeichert. Bei **Local-Server-Systemen** (*tiamo light*, *tiamo full*) liegt diese im Programmverzeichnis des Rechners, auf dem das Programm installiert wurde. Bei **Client-Server-Systemen** (*tiamo multi*) werden die Audit-Trail-Daten zentral auf dem Server gespeichert und enthalten sämtliche Aktionen auf allen Rechnern (Clients), die an diesem Server angeschlossen sind.

Konfiguration

Die Aufzeichnung der Audit-Trail-Aktionen kann in den Sicherheitseinstellungen ein- und ausgeschaltet werden.

Oberfläche

Elemente

Die Oberfläche des Programmfensters **Audit Trail** umfasst die folgenden Elemente:

- Menüleiste
- Symbolleiste
- Filterauswahl
- Tabelle der Audit-Trail-Aktionen
- Navigationsleiste

Menüleiste

Die Menüleiste im Programmfenster **Audit Trail** umfasst folgende Hauptmenüpunkte:

- **Datei**
Audit Trail drucken, exportieren, archivieren, löschen
- **Ansicht**
Tabelle aktualisieren, Spaltenanzeige definieren
- **Filter**
Spezialfilter und Schnellfilter definieren und anwenden
- **Extras**
Audit Trail überwachen
- **Hilfe**
tiamo-Hilfe öffnen, Info anzeigen

Menü Datei



Drucken (PDF)

Audit-Trail-Datensätze als PDF-Datei ausgeben.

Exportieren...

Audit-Trail-Datensätze exportieren.

Archivieren...

Audit-Trail-Datensätze archivieren.

Löschen

Archivierte Audit-Trail-Datensätze löschen.

Schliessen

Audit-Trail-Fenster schliessen.

Menü Ansicht



Aktualisieren

Audit-Trail-Tabelle aktualisieren.

Spaltenanzeige

Spalten für Audit-Trail-Tabelle definieren.

Menü Filter



Letzter Filter

Letzten Schnell- oder Spezialfilter wieder anwenden.



Schnellfilter

Schnellfilter anwenden.



Spezialfilter...

Spezialfilter definieren und anwenden.



Filter entfernen

Aktuellen Filter entfernen.

Menü Extras

Überwachung

Überwachung der Audit-Trail-Tabelle definieren.

Installations-Log

Log-Datei für Installation öffnen.

Menü Hilfe



tiamo Hilfe

tiamo-Hilfe öffnen.

Info

Informationen zum Programm und zur Installation anzeigen.

6.4.2 Symbolleiste

-  **Drucken (PDF)**
Audit-Trail-Datensätze als PDF-Datei ausgeben.
-  **Letzter Filter**
Letzten Schnell- oder Spezialfilter wieder anwenden.
-  **Schnellfilter**
Schnellfilter anwenden.
-  **Spezialfilter...**
Spezialfilter definieren und anwenden.
-  **Filter entfernen**
Aktuellen Filter entfernen.
-  **Aktualisieren**
Audit-Trail-Tabelle aktualisieren.
-  **tiamo Hilfe**
tiamo-Hilfe öffnen.

6.4.3 Filterauswahl

Filter

Filter

Auswahl des Filters, nach dem die Audit-Trail-Tabelle gefiltert werden soll:

Alle Einträge

Die Tabelle wird ungefiltert angezeigt.

Schnellfilter

Die Tabelle wird nach dem zuletzt definierten Schnellfilter gefiltert.

Temporärer Filter

Die Tabelle wird nach dem zuletzt definierten, noch nicht gespeicherten Spezialfilter gefiltert.

Filtername

Die Tabelle wird nach dem ausgewählten, gespeicherten Spezialfilter gefiltert.

6.4.4 Navigationsleiste

  201 - 400 von 2098 (gefiltert)  

Die unterhalb der Audit-Trail-Tabelle angezeigte Navigationsleiste dient zum Navigieren bei umfangreichen Tabellen, bei denen nicht mehr alle Einträge gleichzeitig angezeigt werden können. Sie enthält die folgenden Elemente:



Sprung zum ersten Satz an Einträgen in der Audit-Trail-Tabelle.



Zurückschalten zum vorhergehenden Satz an Einträgen in der Audit-Trail-Tabelle.

Anzeige des ausgewählten Satzes ##### - ##### an Einträgen in der Audit-Trail-Tabelle. Falls die Tabelle nicht gefiltert wird, erscheint zusätzlich die

Gesamtzahl aller Einträge. Falls die Tabelle gefiltert wird, erscheint die Gesamtzahl der gefilterten Einträge mit dem Zusatz **(gefiltert)**.



Weiterschalten zum nächsten Satz an Einträgen in der Audit-Trail-Tabelle.



Sprung zum letzten Satz an Einträgen Audit-Trail-Tabelle.

6.4.5 Funktionen

Im Programmfenster **Audit Trail** können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- Audit Trail filtern
- Audit Trail aktualisieren
- Audit Trail exportieren
- Audit Trail archivieren
- Audit Trail löschen
- Audit Trail drucken

6.4.6 Audit-Trail-Tabelle

	Typ	Datum	Anwender	Voller Name	Client	Kategorie	Aktion	Details	Archiviert
1		2004-11-01 09:08:48 UTC+1	doe	Dörig Roland	DOE	Anmeldung	Angemeldet	Anwender: "doe";	☐
2		2004-11-01 09:06:09 UTC+1	doe	Dörig Roland	DOE	Anmeldung	Manuell abgemeldet	Anwender: "doe";	☐
3		2004-11-01 09:06:04 UTC+1	doe	Dörig Roland	DOE	Datenbank	Datenbank gesichert	Name: "ConfigDB"; Verzeich...	☐
4		2004-11-01 07:43:51 UTC+1	doe	Dörig Roland	DOE	Anwenderverwaltung	Anwender hinzugefügt	Gruppe: "Anwender"; Anwe...	☐
5		2004-11-01 07:43:51 UTC+1	doe	Dörig Roland	DOE	Anwenderverwaltung	Anwendereigenschaft geändert	Gruppe: "Anwender"; Anwe...	☐
6		2004-11-01 07:43:20 UTC+1	doe	Dörig Roland	DOE	Anwenderverwaltung	Anwender hinzugefügt	Gruppe: "Anwender"; Anwe...	☐
7		2004-11-01 07:43:20 UTC+1	doe	Dörig Roland	DOE	Anwenderverwaltung	Anwendereigenschaft geändert	Gruppe: "Anwender"; Anwe...	☐
8		2004-11-01 07:11:04 UTC+1	doe	Dörig Roland	DOE	Anmeldung	Angemeldet	Anwender: "doe";	☐
9		2004-10-29 12:10:40 UTC+2	doe	Dörig Roland	DOE	Anmeldung	Manuell abgemeldet	Anwender: "doe";	☐
10		2004-10-29 09:38:03 UTC+2	doe	Dörig Roland	DOE	Konfiguration	Gerät hinzugefügt	Gerätename: "774_1"; Gerä...	☐
11		2004-10-29 09:37:40 UTC+2	doe	Dörig Roland	DOE	Konfiguration	Rack hinzugefügt	Rackname: "6.2041.700"; R...	☐
12		2004-10-29 09:37:09 UTC+2	doe	Dörig Roland	DOE	Anmeldung	Angemeldet	Anwender: "doe";	☐
13		2004-10-29 09:36:47 UTC+2	doe	Dörig Roland	DOE	Anmeldung	Manuell abgemeldet	Anwender: "doe";	☐

Öffnen

Die Audit-Trail-Tabelle wird mit **Extras, Audit Trail** oder dem Symbol im Programmteil **Konfiguration** geöffnet.

Hinweis

Die Tabelle kann nur geöffnet werden, wenn die Option **Audit Trail aktiv** in den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet ist.

Inhalt

In der Audit-Trail-Tabelle werden standardmässig die folgenden Informationen zu Anwenderaktionen angezeigt:

Typ

Symbol zur Charakterisierung der Aktion:



Information zu Aktion, die weder sicherheitsrelevant ist noch die irgendwelche Daten verändert.



Information zu Aktion, die sicherheitsrelevant ist oder mit der Daten verändert wurden.



Information zu Fehler oder fehlerhafter Aktion. Bei diesen Aktionen wird zusätzlich die Zeilennummer auf rotem Hintergrund dargestellt.

Datum

Datum, Zeit und Zeitzone der Aktion.

Anwender

Kurzname des angemeldeten Anwenders.

Voller Name

Voller Name des angemeldeten Anwenders.

Client

Name des Clients, auf dem die Aktion ausgeführt wurde oder der von der Aktion betroffen wurde.

Kategorie

Programmteil, zu dem die Aktion gehört.

Aktion

Kurzbeschreibung der Aktion.

Details

Detailinformationen zur Aktion.

Archiviert

Anzeige, ob die Aktion bereits archiviert wurde oder nicht (nur archivierte Aktionen können gelöscht werden).

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Spaltenanzeige...** können nicht erwünschte Spalten entfernt werden.

Tabellenansicht

Die Audit-Trail-Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:**
Einstellen der Spaltenbreite
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:**
Einstellen der optimalen Spaltenbreite
- **Ziehen des Spaltentitels:**
Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mauscursors auf dem Feld als Tooltip angezeigt.


Funktionen

Es folgende Funktionen ausgeführt werden:

- Audit Trail filtern
- Audit Trail aktualisieren
- Audit Trail exportieren
- Audit Trail archivieren
- Audit Trail löschen
- Audit Trail drucken

Spaltenanzeige

Mit **Ansicht, Spaltenanzeige** wird das Dialogfenster **Spaltenanzeige** geöffnet. Hier können die Spalten definiert werden, welche in der Audit-Trail-Tabelle angezeigt werden sollen.

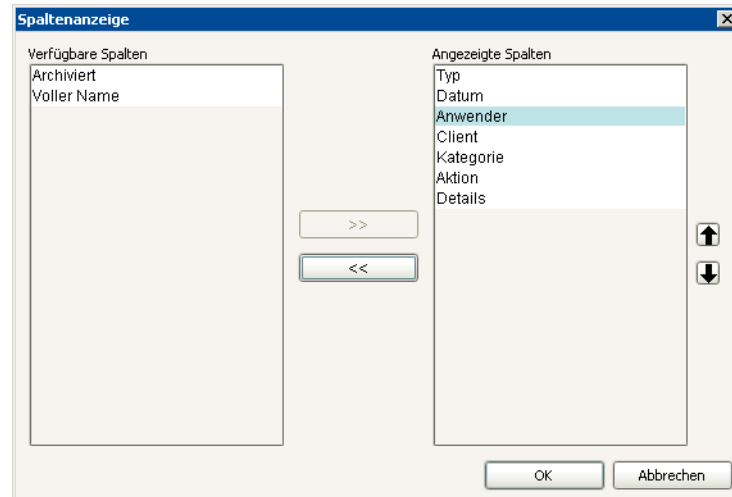


Verfügbare Spalten


Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Audit-Trail-Tabelle angezeigt werden können.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Audit-Trail-Tabelle angezeigt werden. Defaultmässig werden alle verfügbaren Spalten angezeigt.

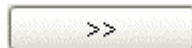

Hinzufügen der ausgewählten Spalte in die Tabelle.

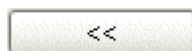

Entfernen der ausgewählten Spalte aus der Tabelle.



Ändern der Reihenfolge der angezeigten Spalten durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach oben bzw. nach unten.

Audit Trail filtern

Für das Filtern von Einträgen in der Audit-Trail-Tabelle gibt es die folgenden Möglichkeiten:


- Filterauswahl in der Filterleiste
- Schnellfilter
- Spezialfilter
- Letzter Filter
- Filter entfernen

Letzter Filter

Mit dem Menüpunkt **Filter, Letzter Filter** oder dem Symbol  im Programmfenster **Audit Trail** wird der zuletzt angewendete Filter wieder aktiviert.

Schnellfilter

Mit dem Menüpunkt **Filter, Schnellfilter** oder dem Symbol  im Programmfenster **Audit Trail** kann eine Schnellfilterung nach dem Inhalt des ausgewählten Tabellenfeldes durchgeführt werden. Nach der Auswahl dieser Funktion wird beim Navigieren innerhalb der Audit-Trail-Tabelle das Feld, in dem sich der Cursor befindet, farbig hinterlegt. Gleichzeitig erscheint das folgende, spezielle Filtersymbol:

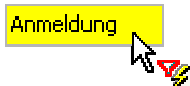


Durch Klicken mit der linken Maustaste wird der Inhalt des in der Tabelle ausgewählten Feldes als Filterbedingung gesetzt und dieser Filter direkt auf die Tabelle angewendet.

Hinweis

Innerhalb der gefilterten Tabelle kann der Schnellfilter erneut angewendet werden, so dass die Anzahl Einträge schrittweise eingeschränkt werden kann.

Spezialfilter

Mit dem Menüpunkt **Filter, Spezialfilter** oder dem Symbol  im Programmfenster **Audit Trail** öffnet sich das Dialogfenster **Spezialfilter** für die Definition von anwenderspezifischen Filtern.

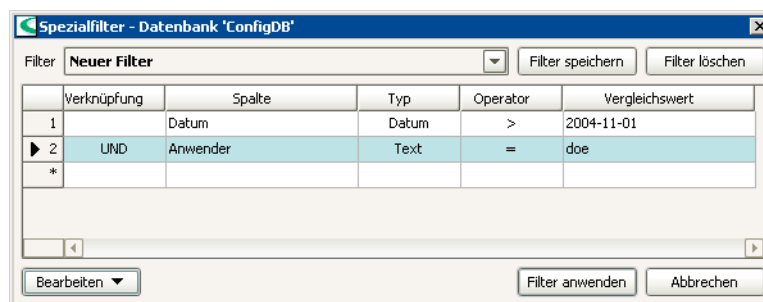

	Verknüpfung	Spalte	Typ	Operator	Vergleichswert
1		Datum	Datum	>	2004-11-01
2	UND	Anwender	Text	=	doe
*					

Filter

Filtername, [Neuer Filter]

Auswahl des Filters, der zum Bearbeiten geladen werden soll. Standardmässig wird eine leere Tabelle unter dem Namen **Neuer Filter** geladen.

Filter speichern

Öffnen des Dialogfensters **Filter speichern**, in dem die in der Tabelle eingetragenen Filterbedingungen unter dem gewünschten Namen als Spezialfilter gespeichert werden können.

Filter löschen

Der aktuell geladene Spezialfilter wird gelöscht.

Tabellenansicht

Die Übersichtstabelle zeigt alle definierten Filterbedingungen an und ist selber nicht direkt editierbar. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:
Einstellen der Spaltenbreite
- Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:
Einstellen der optimalen Spaltenbreite

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mausursors auf dem Feld als Tooltip angezeigt.

Zur Bedeutung der Spalten siehe Filterbedingung bearbeiten.

Funktionen



Das Menü **Bearbeiten** unterhalb der Filtertabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Zeile bearbeiten

Öffnen des Dialogfensters **Filterbedingung bearbeiten**, in dem die Filterbedingung der in der Tabelle ausgewählten Zeile bearbeitet werden können.

Neue Zeile einfügen

Neue, leere Zeile oberhalb der in der Tabelle ausgewählten Zeile einfügen. Dabei öffnet sich automatisch das Dialogfenster **Filterbedingung bearbeiten**.

Zeilen ausschneiden

Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage übertragen.

Zeilen kopieren

Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage kopieren.

Zeilen einfügen

Zeilen aus der Zwischenablage oberhalb ausgewählten Zeile einfügen.

Zeilen löschen

Ausgewählte Zeilen löschen.



Filterbedingungen auf die Audit-Trail-Tabelle anwenden.

Filterbedingung bearbeiten

Mit **Bearbeiten**, **Zeile bearbeiten** öffnet sich das Dialogfenster **Filterbedingung # bearbeiten**, in dem die in der Filtertabelle ausgewählte Filterbedingung bearbeitet werden kann.

Verknüpfung

[UND], ODER

Auswahl der Verknüpfungsart (logischer Operator) mit der vorhergehenden Filterbedingung.

Spalte

[Typ], Datum, Anwender, Voller Name, Client, Kategorie, Aktion, Archiviert
Auswahl der Spalte, für die eine Bedingung definiert werden soll. Bei der Auswahl der Spalten **Typ**, **Kategorie**, **Aktion** und **Archiviert** muss anschließend der **Vergleichswert** ausgewählt werden, der automatisch im gleichnamigen Feld eingetragen wird.

Typ

Anzeige des Formattyps für die Spalte.

Operator

für **Typ**, **Kategorie**, **Aktion** und **Archiviert**: =, <>

für **Datum**: =, <>, <, <=, >, >=, Heute

für **Anwender**, **Voller Name** und **Client**: =, <>, leer, nicht leer

Auswahl des Vergleichsoperators für die Filterbedingung.

Hinweis

Wird für die Spalte **Datum** der **Operator Heute** ausgewählt, wird nach dem aktuellen Datum gefiltert. Im Feld **Vergleichswert** kann zusätzlich ein Bereich in Tagen (-9999 ... 9999) definiert werden, nach dem ausgehend vom aktuellen Datum gefiltert werden soll.

Vergleichswert

für **Datum**: Datumswahl

für **Datum** mit **Operator** = Heute: -9999 ... 9999

für **Anwender**, **Voller Name** und **Client**: 250 Zeichen

Auswahl oder Eingabe des Vergleichswertes für die Filterbedingung.

Gross-/Kleinschreibung beachten

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird beim Filtern der Spalten **Anwender**, **Voller Name** und **Client** auf Gross-/Kleinschreibung geachtet.


Stern (*) als Platzhalter verwenden

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, kann beim Filtern der Spalten **Anwender**, **Voller Name** und **Client** der Stern * als Platzhalter für beliebige Zeichenfolgen verwendet werden.

Filter speichern

Mit der Schaltfläche **[Filter speichern]** öffnet sich das Dialogfenster **Filter speichern** für das Speichern eines Spezialfilters.

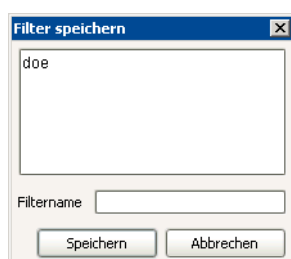

Im oberen Feld werden sämtliche gespeicherten Spezialfilter angezeigt.

Filtername

50 Zeichen

Name, unter dem der Spezialfilter gespeichert werden soll.



Filter unter dem angegebenen Namen speichern.

Hinweis

Die Filter werden global in der Konfigurationsdatenbank gespeichert und sind so für alle Clients verfügbar.

Filter entfernen

Mit dem Menüpunkt **Filter, Filter entfernen** oder dem Symbol  im Programmfenster **Audit Trail** wird der zuletzt angewendete Filter wieder entfernt und es werden alle Einträge angezeigt.

Audit Trail aktualisieren

Mit dem Menüpunkt **Ansicht, Aktualisieren** oder dem Symbol  im Programmfenster **Audit Trail** wird die Audit-Trail-Tabelle aktualisiert.

Hinweis

Die Audit-Trail-Tabelle wird beim Öffnen automatisch aktualisiert, danach aber nicht mehr.

Audit Trail exportieren

Mit dem Menüpunkt **Datei, Exportieren** im Programmfenster **Audit Trail** öffnet sich das Dialogfenster **Audit Trail exportieren**.



Datei speichern unter **1000 Zeichen**

Eingabe oder Auswahl (mit ) des vollständigen Pfades und des Dateinamens für die Speicherung der Exportdatei.

Auswahl

[Alle Datensätze]

Es werden alle Einträge aus der gefilterten Audit-Trail-Tabelle exportiert.

Ausgewählte Datensätze


Es werden nur die in der Audit-Trail-Tabelle ausgewählten Einträge exportiert.

Hinweis

Audit-Trail-Einträge werden im Text-Format exportiert. Sie können nicht mehr zurück in die Audit-Trail-Tabelle importiert werden.

Audit Trail archivieren

Mit dem Menüpunkt **Datei, Archivieren** im Programmfenster **Audit Trail** öffnet sich das Dialogfenster **Audit Trail archivieren**.

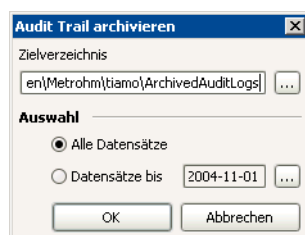

Zielverzeichnis

1000 Zeichen

Eingabe oder Auswahl (mit ) des Verzeichnisses, in dem die Audit-Trail-Einträge archiviert werden.

Auswahl

[Alle Datensätze]

Es werden alle Einträge aus der gefilterten Audit-Trail-Tabelle archiviert.

Datensätze bis ...

Es werden nur Einträge bis zum ausgewählten Datumseintrag aus der Audit-Trail-Tabelle archiviert.

Hinweis

Audit-Trail-Einträge werden im Text-Format archiviert. Sie können nicht mehr zurück in die Audit-Trail-Tabelle importiert werden.

Audit Trail löschen

Mit dem Menüpunkt **Datei, Löschen** im Programmfenster **Audit Trail** öffnet sich das Dialogfenster **Audit Trail löschen**.



Auswahl

[Alle archivierten Datensätze]

Es werden alle bereits archivierten Einträge aus der Audit-Trail-Tabelle gelöscht.

Archivierte Datensätze bis ...

Es werden nur archivierte Einträge aus der Audit-Trail-Tabelle gelöscht, die bis zum ausgewählten Datumseintrag erzeugt wurden.

Anwender 1

Anwender

Kurzname des ersten Anwenders, der die Berechtigung zum Löschen von Audit-Trail-Einträgen hat.

Passwort

Passwort des ersten Anwenders, der die Berechtigung zum Löschen von Audit-Trail-Einträgen hat.

Anwender 2

Anwender


Kurzname des zweiten Anwenders, der die Berechtigung zum Löschen von Audit-Trail-Einträgen hat.

Passwort

Passwort des zweiten Anwenders, der die Berechtigung zum Löschen von Audit-Trail-Einträgen hat.

Audit Trail drucken

Mit dem Menüpunkt **Datei, Drucken (PDF)** oder dem Symbol  im Programmfenster **Audit Trail** öffnet sich das Dialogfenster **Audit Trail drucken (PDF)**.

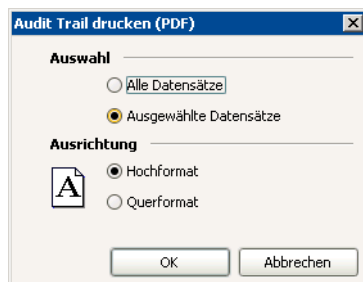

Auswahl

Alle Datensätze

ein, [aus]

Es werden alle Einträge aus der gefilterten Audit-Trail-Tabelle gedruckt.

Ausgewählte Datensätze

[ein], aus

Es werden nur die in der Audit-Trail-Tabelle ausgewählten Einträge gedruckt.

Ausrichtung

Hochformat

[ein], aus

Ausgabe der Audit-Trail-Tabelle im Hochformat.

Querformat

ein, [aus]

Ausgabe der Audit-Trail-Tabelle im Querformat.



Die Audit-Trail-Tabelle wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

Hinweis

Die Audit-Trail-Tabelle wird beim Öffnen automatisch aktualisiert, danach aber nicht mehr.

Audit Trail überwachen

Mit dem Menüpunkt **Extras, Überwachung** im Programmfenster **Audit Trail** öffnet sich das Dialogfenster **Audit Trail überwachen**.



Anzahl Einträge überwachen

[ein], aus

Ist diese Option **eingeschaltet**, wird die Anzahl Einträge in der Audit-Trail-Tabelle überwacht.

Maximale Anzahl

10 ... [100000] ... 500000

Maximal in der Audit-Trail-Tabelle erlaubte Anzahl Einträge. Wird diese Zahl überschritten, erscheint eine Fehlermeldung.

6.5 Unterfenster Geräte

6.5.1 Allgemeines

Unterfenster Geräte

Das Unterfenster **Geräte** enthält die Gerätetabelle mit allen automatisch erkannten und manuell hinzugefügten Geräten und wird im Programmteil **Konfiguration** immer angezeigt, d.h. es kann nicht aus der Konfigurationsansicht entfernt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrößert und verkleinert und auch maximiert werden.

USB-Geräte

Die via USB mit dem PC verbundenen Geräte (z.B. Titrande) werden beim Programmstart automatisch erkannt und in die Gerätetabelle eingetragen. Wird die Verbindung zwischen PC und Gerät oder zur Stromversorgung unterbrochen, bleibt das Gerät mit dem Status **not ok** in der Gerätetabelle erhalten. Wird es wieder angeschlossen, wird es automatisch anhand der Seriennummer identifiziert und wieder dem bestehenden Geräteeintrag zugeordnet. Der Status wechselt dabei auf **ok**.

Peripheriegeräte von USB-Geräten

Die an USB-Geräten angeschlossenen Peripheriegeräte (Dosierer, Rührer, etc.) werden ebenfalls automatisch erkannt. Werden sie bei laufenden Programm angeschlossen oder entfernt, muss nach Bestätigung einer entsprechenden Meldung entweder die USB-Verbindung unterbrochen und wiederhergestellt oder aber *tiamo* neu gestartet werden.

RS232-Geräte

Geräte, welche via RS232-Schnittstelle an den PC angeschlossen werden, werden nicht automatisch erkannt. Sie müssen manuell als neue Geräte zur Gerätetabelle hinzugefügt werden. Wird die Verbindung zwischen PC und Gerät unterbrochen oder das Gerät ausgeschaltet, bleibt es trotzdem mit **ok** in der Gerätetabelle erhalten. Um den Status auf **not ok** zu aktualisieren, muss das Eigenschaftenfenster des Gerätes geöffnet und wieder geschlossen werden. Das gleiche gilt, wenn das Gerät wieder angeschlossen oder eingeschaltet wird.

6.5.2 Gerätetabelle

Geräte							
	Gerätename ▲	Gerätetyp	Geräte-Seriennummer	Status	Inbetriebnahme	Nächster GLP-Test	Bemerkungen
▶ 1	774_1	774 Oven Sample Processor	1112	not ok	2004-10-29		
2	794_1	794 Basic Titrimo	01103	not ok	2004-09-14		
3	814_1	814 USB Sample Processor	99999	not ok	2004-10-29		
4	835_1	835 Titrande	00011	ok	2004-09-13		
5	836_1	836 Titrande	02122	ok	2004-09-13		
Bearbeiten ▼							

Inhalt

In der Gerätetabelle werden standardmässig die folgenden Informationen zu den automatisch erkannten oder manuell hinzugefügten Geräten angezeigt:

Gerätename

Bezeichnung des Gerätes.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

Status

Anzeige des Gerätestatus. Ein betriebsbereites Gerät hat den grün angezeigten Status **ok**, ein nicht betriebsbereites Gerät den rot angezeigten Status **nicht ok**. Geräte, deren Status nicht überprüft werden kann, haben den Eintrag "-".

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Nächster GLP-Test

Anzeige des Datums, an dem der nächste GLP-Test fällig ist. Ist die GLP-Überwachung eingeschaltet und das eingestellte Datum kleiner als das aktuelle Datum (d.h. der GLP-Test wurde noch nicht durchgeführt), wird das Datum mit roter Schrift dargestellt.

Bemerkungen

Anzeige der Bemerkungen zum Gerät.

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Spaltenanzeige...** können die weiteren Spalten **Programmversion** und **Datum GLP-Test** angezeigt werden.

Hinweise

Bei Zeilen mit roten Einträgen wird zusätzlich der Hintergrund der Zeilennummer rot markiert.

Sobald eine Bestimmung gestartet wird, werden alle in der Methode verwendeten Geräte oder Gerätekomponenten (Dosierer, Messeingang) besetzt, d.h. sie können weder in einer Parallelsteuerung noch in der manuellen Bedienung verwendet oder konfiguriert werden, bis die Bestimmung beendet ist. Die Zeile eines besetzten Gerätes wird in grauer Schrift dargestellt.

Tabellenansicht

Die Gerätetabelle ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermaßen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:**
Einstellen der Spaltenbreite
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:**
Einstellen der optimalen Spaltenbreite
- **Ziehen des Spaltentitels:**
Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mauscursors auf dem Feld als Tooltip angezeigt.

Funktionen

 **Bearbeiten**

Das Menü **Bearbeiten** unterhalb der Gerätetabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu...

Manuelles Hinzufügen eines neuen Gerätes, welches via RS232-Schnittstelle an den PC angeschlossen wird.

Löschen

Löschen des ausgewählten Gerätes. Es können nur Geräte gelöscht werden, die nicht angeschlossen sind.

Eigenschaften...

Bearbeiten des ausgewählten Gerätes.

Spaltenanzeige...


Spalten für Gerätetabelle definieren.

Drucken (PDF)...

Ausgabe der Gerätetabelle als PDF-Datei.

Spaltenanzeige

Mit **Bearbeiten, Spaltenanzeige...** wird das Dialogfenster **Spaltenanzeige** geöffnet. Hier können die Spalten definiert werden, welche in der Gerätetabelle angezeigt werden sollen.

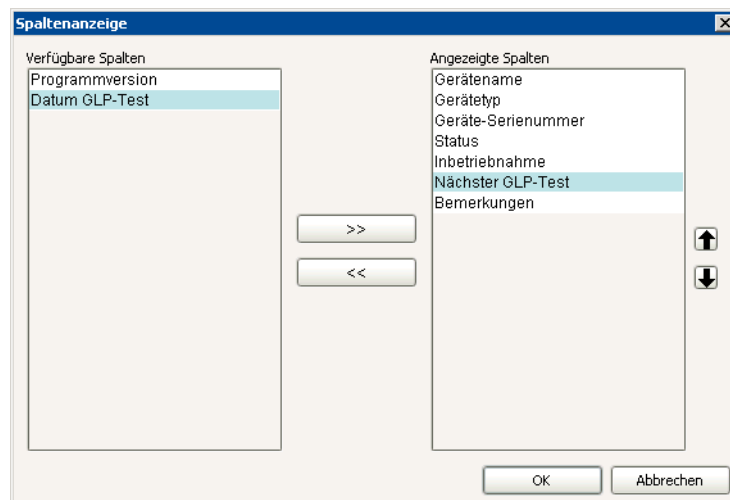


Verfügbare Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Gerätetabelle angezeigt werden können.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Gerätetabelle angezeigt werden. Defaultmässig werden die Spalten **Gerätename**, **Gerätetyp**, **Geräte-Seriennummer**, **Status**, **Inbetriebnahme**, **Nächster GLP-Test**, **Bemerkungen** angezeigt. Die Spalten **Gerätename** und **Gerätetyp** sind immer vorhanden und können nicht entfernt werden.

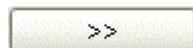

Hinzufügen der ausgewählten Spalte in die Tabelle.




Entfernen der ausgewählten Spalte aus der Tabelle.



Ändern der Reihenfolge der angezeigten Spalten durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach oben bzw. nach unten.

Neues Gerät hinzufügen

Geräte, welche via RS232-Schnittstelle an den PC angeschlossen werden, müssen manuell mit **Bearbeiten, Neu...** zur Gerätetabelle hinzugefügt werden. Dabei öffnet sich das Dialogfenster **Geräteauswahl**.

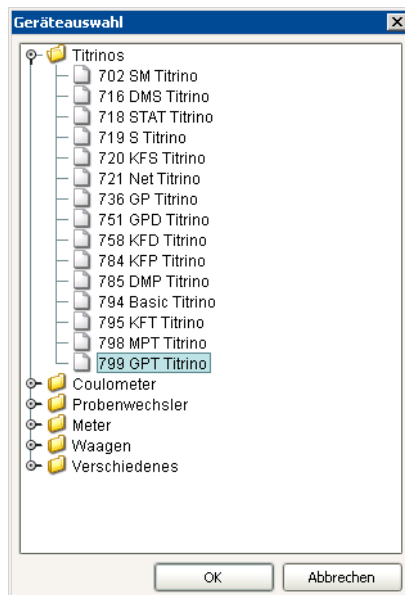

Das gewünschte neue Gerät muss aus der baumartig angebotenen Liste ausgewählt werden, die alle dem Programm bekannten Geräte (nach Gerätetyp geordnet) enthält. Nach dem Schliessen des Dialogfensters mit **[OK]** wird automatisch das Eigenschaftsfenster zur Eingabe der weiteren Gerätedaten geöffnet.

Nach dem Schliessen des Eigenschaftsfensters wird das neue Gerät mit den eingestellten Parametern in die Gerätetabelle eingetragen und die Verbindung getestet. Ist die Verbindung **ok**, so werden die weiteren verfügbaren Geräteinformationen aus dem Gerät ausgelesen.

Gerät löschen


Mit **Bearbeiten, Löschen** wird das in der Gerätetabelle ausgewählte Gerät gelöscht.

Hinweis

Es können nur Geräte gelöscht werden, die nicht angeschlossen sind.

Geräteliste drucken

Mit **Bearbeiten, Drucken (PDF)...** wird das Dialogfenster **Geräteliste drucken (PDF)** geöffnet.

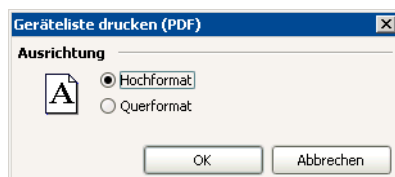

Ausrichtung

Hochformat

[ein], aus

Ausgabe der Gerätetabelle im Hochformat.

Querformat

ein, [aus]

Ausgabe der Gerätetabelle im Querformat.



Die Gerätetabelle wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, von wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

6.5.3 Geräteeigenschaften

Übersicht

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Eigenschaften...** im Unterfenster **Geräte** wird das Eigenschaftenfenster für das in der Gerätetabelle ausgewählte Gerät geöffnet, in dem die Parameter des Gerätes bearbeitet werden können. Es besteht aus mehreren Registerkarten. Die Registerkarten **Allgemein** und **GLP** sind immer vorhanden, die weiteren Registerkarten hängen vom ausgewählten Gerät ab. Für die folgenden Geräte sind Eigenschaften einstellbar:

- Titrandos 808, 809, 835, 836, 841
- Dosing Interface 846
- Titrinos 702, 716, 718, 719, 720, 721, 736, 751, 758, 784, 785, 794, 795, 798, 799
- Sample Changer 730
- Probenwechsler 774
- Sample Processor 778, 789
- USB Sample Processor 814, 815
- Coulometer 756, 831
- Konduktometer 712
- Universelles RS232-Gerät
- Waagen
- Barcodeleser

Titrando

Die Parameter für die **Titrandos 808, 809, 835, 836** und **841** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein**
Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätenamen, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- **Messeingänge**
Eigenschaften der Messeingänge.
- **MSB #**
Eigenschaften des MSB-Anschlusses 1...4 und der daran angeschlossenen Peripheriegeräte.
- **GLP**
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

Allgemein

Gerätename

50 Zeichen, [Gerätetypnummer_#]

Vom Anwender beliebig wählbare Bezeichnung für das Gerät.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, die durch *tiamo* selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Serienummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Betriebsstunden

Anzeige der Anzahl Betriebsstunden (nur für die Geräte 778, 789, 814 und 815).

Bemerkungen

1000 Zeichen, [leer]

Bemerkungen zum Gerät.

Verbindung trennen

Diese Schaltfläche wird nur bei Waagen oder einem Barcodeleser angezeigt. Damit das Gerät aus der Geräteliste gelöscht werden kann, muss die Verbindung getrennt werden.

Neue Programmversion laden

Wird beim Anschluss eines Gerätes festgestellt, dass dieses eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, muss diese aktualisiert werden. Dazu muss das Gerät in der Gerätetabelle ausgewählt und mit **Bearbeiten, Eigenschaften** das Eigenschaftensfenster für dieses Gerät geöffnet werden. Auf der Registerkarte **Allgemein** ist dann die Schaltfläche **[Aktualisieren]** aktiv.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**.

Alte Version

Anzeige der alten Geräteprogrammversion.

Neue Version

Anzeige der neu zu ladenden Geräteprogrammversion.



Neue Geräteprogrammversion laden.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorganges nicht manipuliert oder ausgeschaltet wird und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Messeingänge

Messeingang 1/2

ADC-Typ

Anzeige des Typs des Analog-Digital-Wandlers.

ADC-Serienummer

Anzeige der Seriennummer des Messeinganges.

Temperatursensor

[Pt 1000], NTC

Auswahl des Temperatursensortyps, der am Messeingang angeschlossen wird. Für einen Temperatursensor des Typs **NTC** sind zwei weitere Parameter sichtbar:

R (25 °C)

1000 ... [30000] ... 99999 Ohm

Nennwiderstand des angeschlossenen NTC-Fühlers .

B-Wert

1000 ... [4100] ... 9999

Materialkonstante des NTC-Widerstands bezogen auf Messungen des Widerstands bei 25 °C und 50 °C.

Hinweis

Titrande-Modelle 2.8xx.0010 besitzen nur einen Messeingang.

MSB



Aufforderung für Dosierervorbereitung

Auswahl, wann die Aufforderung zur Durchführung des Befehls **PREP** (Vorbereiten) für den am MSB angeschlossenen Dosierer angezeigt werden soll.

Beim Programmstart

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, erscheint bei jedem Programmstart die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Beim Aufsetzen einer Wechsel-/Dosiereinheit

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, erscheint beim Aufsetzen der Wechseleinheit auf den Titrande oder Dosimat bzw. beim Aufsetzen der Dosiereinheit auf den Dosino die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Zeitintervall

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, erscheint nach dem nachstehend definierten Zeitintervall die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

alle

0.1 ... [12] ... 999.9 h

Zeitintervall, nach dem die Aufforderung zur Dosierervorbereitung erscheint.

Angeschlossene Geräte

Hier werden Angaben zu den folgenden, am MSB-Anschluss angeschlossenen Peripheriegeräte angezeigt:

- **Dosierer**
Für die angeschlossenen Dosierer werden der **Dosierertyp** und für Dosierer des Typs 8xx zusätzlich die **Dosierer-Seriennummer** angezeigt.
- **Rührer**
Für die angeschlossenen Rührer werden der **Rührertyp** und die **Rührer-Seriennummer** angezeigt.
- **Remote-Box**
Für eine angeschlossene Remote-Box können keine Eigenschaften angezeigt werden.

GLP

Datum GLP-Test

Datumsauswahl

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden.

Kommentar GLP-Test

1000 Zeichen, [leer]

Kommentar zum GLP-Test.

GLP-Gültigkeit überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Hinweis

Diese Option kann erst eingeschaltet werden, wenn unter **Datum GLP-Test** ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

0 ... [999] Tage

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Intervall eingegeben, wird das Datum für **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nächster GLP-Test

Datumsauswahl, [Datum GLP-Test + 999 Tage]

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Aktion

Ist das Zeitintervall für den GLP-Test abgelaufen, wird sowohl beim Starttest wie auch beim Befehlsablauf eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren

Die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die

Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen

Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **<OK>** quittiert werden.

Titrimo

Die Parameter für die **Titrimos 702, 716, 718, 719, 720, 721, 736, 751, 758, 784, 785, 794, 795, 798 und 799** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein**
Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätename, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- **Int. Dosierer D0**
Eigenschaften des internen Dosierers.
- **Ext. Dosierer D1/D2**
Eigenschaften der angeschlossenen externen Dosierer (685 Dosimat oder 700 Dosino).

Hinweis

Diese Registerkarten für externe Dosierer sind nur bei den Titrimos 736, 751, 758 und 799 vorhanden.

- **RS232**
Auswahl der seriellen Schnittstelle, an welcher der Titrimo angeschlossen ist.
- **GLP**
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

Allgemein

Gerätename

50 Zeichen, [Gerätetypnummer_#]

Vom Anwender beliebig wählbare Bezeichnung für das Gerät.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, die durch *tiamo* selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Betriebsstunden

Anzeige der Anzahl Betriebsstunden (nur für die Geräte 778, 789, 814 und 815).

Bemerkungen

1000 Zeichen, [leer]

Bemerkungen zum Gerät.

Verbindung trennen

Diese Schaltfläche wird nur bei Waagen oder einem Barcodeleser angezeigt. Damit das Gerät aus der Geräteliste gelöscht werden kann, muss die Verbindung getrennt werden.

Neue Programmversion laden

Wird beim Anschluss eines Gerätes festgestellt, dass dieses eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, muss diese aktualisiert werden. Dazu muss das Gerät in der Gerätetabelle ausgewählt und mit **Bearbeiten, Eigenschaften** das Eigenschaftsfenster für dieses Gerät geöffnet werden. Auf der Registerkarte **Allgemein** ist dann die Schaltfläche **[Aktualisieren]** aktiv.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**.

Alte Version

Anzeige der alten Geräteprogrammversion.

Neue Version

Anzeige der neu zu ladenden Geräteprogrammversion.


Laden

Neue Geräteprogrammversion laden.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorganges nicht manipuliert oder ausgeschaltet wird und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Int. Dosierer D0

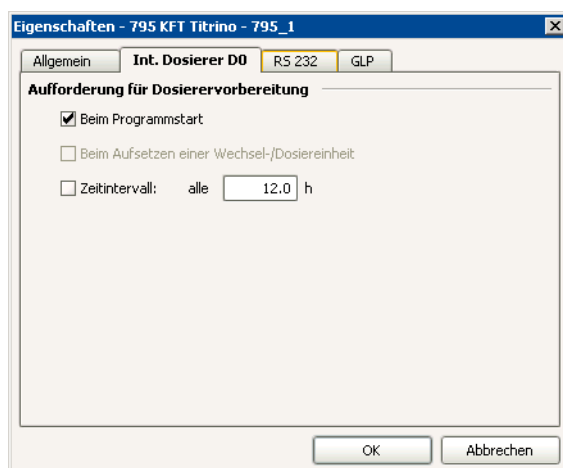

Aufforderung für Dosierervorbereitung

Auswahl, wann die Aufforderung zur Durchführung eines Befehls **PREP**- (Vorbereiten) für den internen Dosierer angezeigt werden soll.

Beim Programmstart

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, erscheint bei jedem Programmstart die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Zeitintervall

ein, [aus]


Ist diese Option eingeschaltet, erscheint nach dem nachstehend definierten Zeitintervall die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

alle

0.1 ... [12] ... 999.9 h

Zeitintervall, nach dem die Aufforderung zur Dosierervorbereitung erscheint.

Ext. Dosierer D#

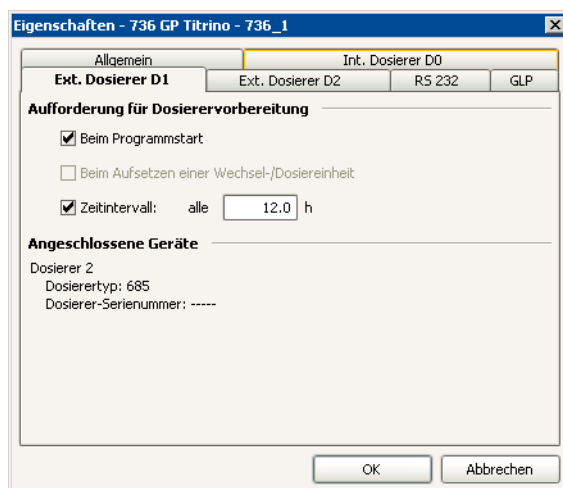

Aufforderung für Dosierervorbereitung

Auswahl, wann die Aufforderung zur Durchführung eines Befehls **PREP** (Vorbereiten) für den externen Dosierer **D1** bzw. **D2** angezeigt werden soll.

Beim Programmstart

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, erscheint bei jedem Programmstart die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Zeitintervall

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, erscheint nach dem nachstehend definierten Zeitintervall die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

alle


0.1 ... [12] ... 999.9 h

Zeitintervall, nach dem die Aufforderung zur Dosierervorbereitung erscheint.

Angeschlossene Geräte

Hier wird für den am Dosiereranschluss angeschlossenen Dosierer der **Dosierertyp** (685 Dosimat oder 700 Dosino) angezeigt, falls dies im Gerät selber konfiguriert wurde.

RS 232

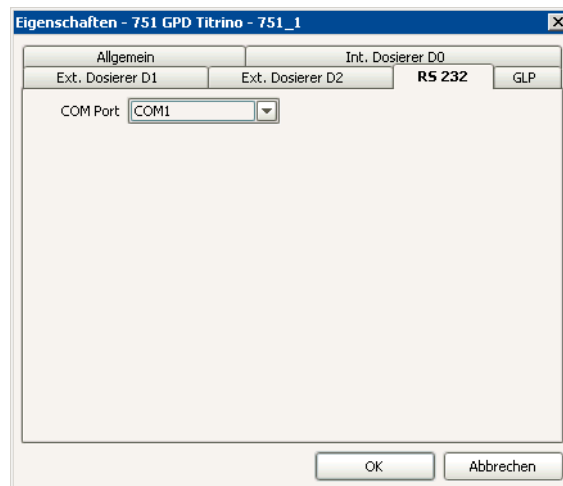


COM Port

COM1, COM2, ..., [erster freier COM Port]

Auswahl der seriellen Schnittstelle am PC, an welcher das Gerät angeschlossen ist.

GLP

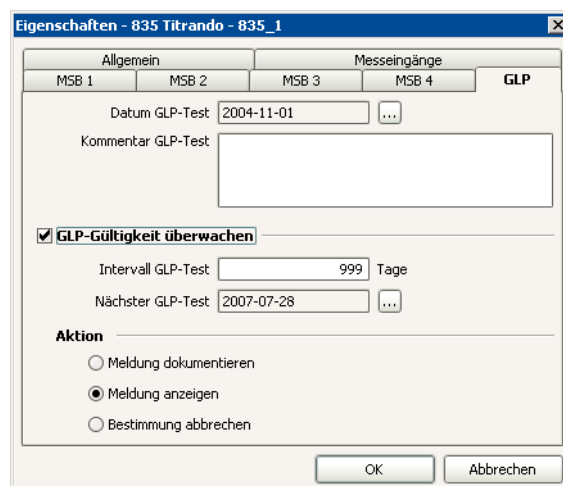

Datum GLP-Test

Datumsauswahl

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen) ausgewählt werden.

Kommentar GLP-Test
1000 Zeichen, [leer]
 Kommentar zum GLP-Test.

GLP-Gültigkeit überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Hinweis

*Diese Option kann erst eingeschaltet werden, wenn unter **Datum GLP-Test** ein Datum eingegeben wurde.*

Intervall GLP-Test

0 ... [999] Tage

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Intervall eingegeben, wird das Datum für **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nächster GLP-Test

Datumsauswahl, [Datum GLP-Test + 999 Tage]

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Dieses

Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Aktion

Ist das Zeitintervall für den GLP-Test abgelaufen, wird sowohl beim Starttest wie auch beim Befehlsablauf eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren

Die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen

Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **<OK>** quittiert werden.

Coulometer

Die Parameter für die **Coulometer 756** und **831** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein**
Allgemeine Geräteinformationen wie Geräte-Name, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- **RS232**
Auswahl der seriellen Schnittstelle, an welcher das Coulometer angeschlossen ist.
- **GLP**
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

Allgemein

Gerätename

50 Zeichen, [Gerätetypnummer_#]

Vom Anwender beliebig wählbare Bezeichnung für das Gerät.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, die durch *tiamo* selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Betriebsstunden

Anzeige der Anzahl Betriebsstunden (nur für die Geräte 778, 789, 814 und 815).

Bemerkungen

1000 Zeichen, [leer]

Bemerkungen zum Gerät.

Verbindung trennen

Diese Schaltfläche wird nur bei Waagen oder einem Barcodeleser angezeigt. Damit das Gerät aus der Geräteliste gelöscht werden kann, muss die Verbindung getrennt werden.

Neue Programmversion laden

Wird beim Anschluss eines Gerätes festgestellt, dass dieses eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, muss diese aktualisiert werden. Dazu muss das Gerät in der Gerätetabelle ausgewählt und mit **Bearbeiten, Eigenschaften** das Eigenschaftsfenster für dieses Gerät geöffnet werden. Auf der Registerkarte **Allgemein** ist dann die Schaltfläche **[Aktualisieren]** aktiv.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**.

Alte Version

Anzeige der alten Geräteprogrammversion.

Neue Version

Anzeige der neu zu ladenden Geräteprogrammversion.




Neue Geräteprogrammversion laden.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorganges nicht manipuliert oder ausgeschaltet wird und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

RS 232

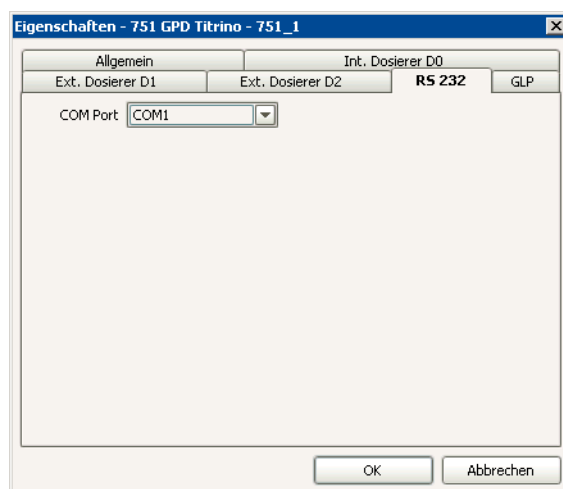


COM Port

COM1, COM2, ..., [erster freier COM Port]

Auswahl der seriellen Schnittstelle am PC, an welcher das Gerät angeschlossen ist.

GLP

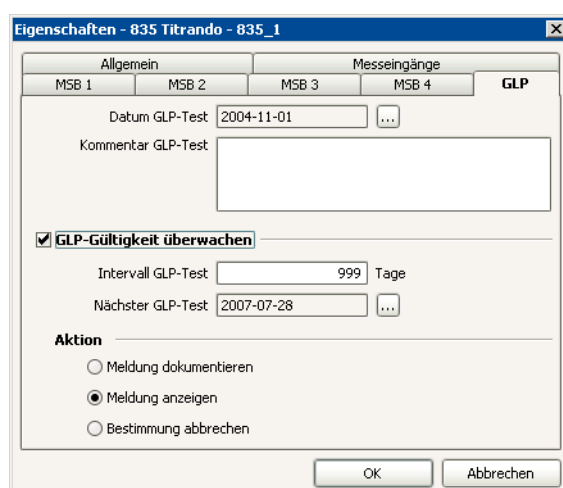

Datum GLP-Test

Datumsauswahl

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen) ausgewählt werden.

Kommentar GLP-Test
1000 Zeichen, [leer]
Kommentar zum GLP-Test.

GLP-Gültigkeit überwachen

ein, [aus]
Ist diese Option eingeschaltet, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Hinweis

*Diese Option kann erst eingeschaltet werden, wenn unter **Datum GLP-Test** ein Datum eingegeben wurde.*

Intervall GLP-Test
0 ... [999] Tage
Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Intervall eingegeben, wird das Datum für **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nächster GLP-Test
Datumsauswahl, [Datum GLP-Test + 999 Tage]
Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Aktion

Ist das Zeitintervall für den GLP-Test abgelaufen, wird sowohl beim Starttest wie auch beim Befehlsablauf eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **<OK>** quittiert werden.

Konduktometer

Die Parameter für das **Konduktometer 712** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein**
Allgemeine Geräteinformationen wie Geräteiname, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- **RS232**
Auswahl der seriellen Schnittstelle, an welcher das Coulometer angeschlossen ist.
- **GLP**
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

Allgemein

Geräte-Name

50 Zeichen, [Gerätetypnummer_#]

Vom Anwender beliebig wählbare Bezeichnung für das Gerät.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, die durch *tiamo* selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Betriebsstunden

Anzeige der Anzahl Betriebsstunden (nur für die Geräte 778, 789, 814 und 815).

Bemerkungen

1000 Zeichen, [leer]

Bemerkungen zum Gerät.

Verbindung trennen

Diese Schaltfläche wird nur bei Waagen oder einem Barcodeleser angezeigt. Damit das Gerät aus der Geräteliste gelöscht werden kann, muss die Verbindung getrennt werden.

Neue Programmversion laden

Wird beim Anschluss eines Gerätes festgestellt, dass dieses eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, muss diese aktualisiert werden. Dazu muss das Gerät in der Gerätetabelle ausgewählt und mit **Bearbeiten, Eigenschaften** das Eigenschaftsfenster für dieses Gerät geöffnet werden. Auf der Registerkarte **Allgemein** ist dann die Schaltfläche **[Aktualisieren]** aktiv.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**.

Alte Version

Anzeige der alten Geräteprogrammversion.

Neue Version

Anzeige der neu zu ladenden Geräteprogrammversion.




Neue Geräteprogrammversion laden.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorganges nicht manipuliert oder ausgeschaltet wird und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

RS 232

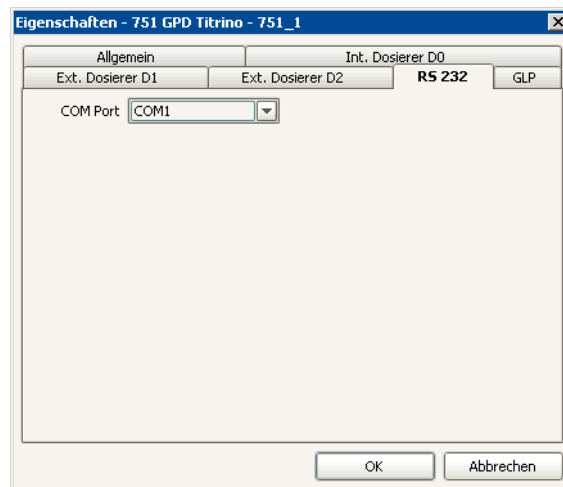


COM Port

COM1, COM2, ..., [erster freier COM Port]

Auswahl der seriellen Schnittstelle am PC, an welcher das Gerät angeschlossen ist.

GLP

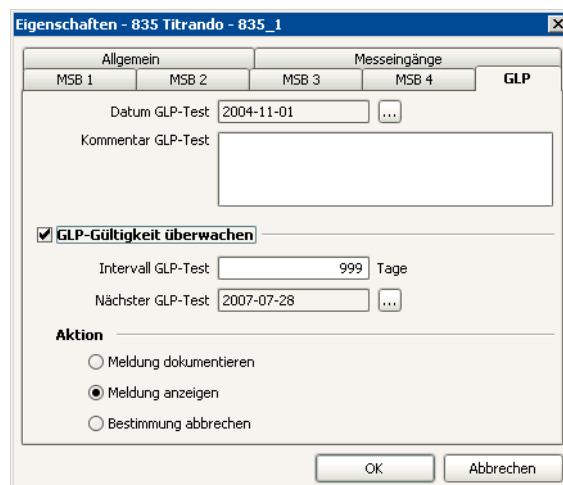

Datum GLP-Test Datumsauswahl

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden.

Kommentar GLP-Test
1000 Zeichen, [leer]
Kommentar zum GLP-Test.

GLP-Gültigkeit überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Hinweis

*Diese Option kann erst eingeschaltet werden, wenn unter **Datum GLP-Test** ein Datum eingegeben wurde.*

Intervall GLP-Test 0 ... [999] Tage

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Intervall eingegeben, wird das Datum für **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nächster GLP-Test Datumsauswahl, [Datum GLP-Test + 999 Tage]

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Aktion

Ist das Zeitintervall für den GLP-Test abgelaufen, wird sowohl beim Starttest wie auch beim Befehlsablauf eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren

Die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen

Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **<OK>** quittiert werden.

Dosing Interface

Die Parameter für das Gerät **Dosing Interface 846** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein**
Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätenamen, Gerätetyp, Seriennummer etc.

- **MSB #**
Eigenschaften des MSB-Anschlusses und der daran angeschlossenen Peripheriegeräte.
- **GLP**
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

Allgemein

Gerätename

50 Zeichen, [Gerätetypnummer_#]

Vom Anwender beliebig wählbare Bezeichnung für das Gerät.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, die durch *tiamo* selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Betriebsstunden

Anzeige der Anzahl Betriebsstunden (nur für die Geräte 778, 789, 814 und 815).

Bemerkungen

1000 Zeichen, [leer]

Bemerkungen zum Gerät.

Verbindung trennen

Diese Schaltfläche wird nur bei Waagen oder einem Barcodeleser angezeigt. Damit das Gerät aus der Geräteliste gelöscht werden kann, muss die Verbindung getrennt werden.

Neue Programmversion laden

Wird beim Anschluss eines Gerätes festgestellt, dass dieses eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, muss diese aktualisiert werden. Dazu

muss das Gerät in der Gerätetabelle ausgewählt und mit **Bearbeiten, Eigenschaften** das Eigenschaftensfenster für dieses Gerät geöffnet werden. Auf der Registerkarte **Allgemein** ist dann die Schaltfläche **[Aktualisieren]** aktiv.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**.

Alte Version

Anzeige der alten Geräteprogrammversion.

Neue Version

Anzeige der neu zu ladenden Geräteprogrammversion.

Laden

Neue Geräteprogrammversion laden.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorganges nicht manipuliert oder ausgeschaltet wird und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

MSB



Aufforderung für Dosierervorbereitung

Auswahl, wann die Aufforderung zur Durchführung des Befehls **PREP** (Vorbereiten) für den am MSB angeschlossenen Dosierer angezeigt werden soll.

Beim Programmstart

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, erscheint bei jedem Programmstart die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Beim Aufsetzen einer Wechsel-/Dosiereinheit

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, erscheint beim Aufsetzen der Wechseleinheit auf den Titrande oder Dosimat bzw. beim Aufsetzen der Dosiereinheit auf den Dosino die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Zeitintervall

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, erscheint nach dem nachstehend definierten Zeitintervall die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

alle

0.1 ... [12] ... 999.9 h

Zeitintervall, nach dem die Aufforderung zur Dosierervorbereitung erscheint.

Angeschlossene Geräte

Hier werden Angaben zu den folgenden, am MSB-Anschluss angeschlossenen Peripheriegeräte angezeigt:

- **Dosierer**
Für die angeschlossenen Dosierer werden der **Dosierertyp** und für Dosierer des Typs 8xx zusätzlich die **Dosierer-Seriennummer** angezeigt.
- **Rührer**
Für die angeschlossenen Rührer werden der **Rührertyp** und die **Rührer-Seriennummer** angezeigt.
- **Remote-Box**
Für eine angeschlossene Remote-Box können keine Eigenschaften angezeigt werden.

GLP

Datum GLP-Test

Datumsauswahl

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen) ausgewählt werden.

Kommentar GLP-Test

1000 Zeichen, [leer]

Kommentar zum GLP-Test.

GLP-Gültigkeit überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Hinweis

Diese Option kann erst eingeschaltet werden, wenn unter **Datum GLP-Test** ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

0 ... [999] Tage

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Intervall eingegeben, wird das Datum für **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nächster GLP-Test

Datumsauswahl, [Datum GLP-Test + 999 Tage]

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe

Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Aktion

Ist das Zeitintervall für den GLP-Test abgelaufen, wird sowohl beim Starttest wie auch beim Befehlsablauf eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren

Die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen

Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **<OK>** quittiert werden.

814/815 USB Sample Processor

Die Parameter für die Geräte **814 USB Sample Processor** und **815 Robotic USB Sample Processor XL** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein**
Allgemeine Geräteinformationen wie Geräte name, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- **Turm #**
Eigenschaften von Turm 1 und Turm 2 (falls vorhanden).
- **Rack**
Angaben zum aufgesetzten Rack.
- **MSB #**
Eigenschaften des MSB-Anschlusses 1...3 und der daran angeschlossenen Peripheriegeräte.
- **GLP**
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

Allgemein

Gerätename

50 Zeichen, [Gerätetypnummer_#]

Vom Anwender beliebig wählbare Bezeichnung für das Gerät.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, die durch *tiamo* selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Betriebsstunden

Anzeige der Anzahl Betriebsstunden (nur für die Geräte 778, 789, 814 und 815).

Bemerkungen

1000 Zeichen, [leer]

Bemerkungen zum Gerät.

Verbindung trennen

Diese Schaltfläche wird nur bei Waagen oder einem Barcodeleser angezeigt. Damit das Gerät aus der Geräteliste gelöscht werden kann, muss die Verbindung getrennt werden.

Neue Programmversion laden

Wird beim Anschluss eines Gerätes festgestellt, dass dieses eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, muss diese aktualisiert werden. Dazu muss das Gerät in der Gerätetabelle ausgewählt und mit **Bearbeiten, Eigenschaften** das Eigenschaftsfenster für dieses Gerät geöffnet werden. Auf der Registerkarte **Allgemein** ist dann die Schaltfläche **[Aktualisieren]** aktiv.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**.

Alte Version

Anzeige der alten Geräteprogrammversion.

Neue Version

Anzeige der neu zu ladenden Geräteprogrammversion.



Neue Geräteprogrammversion laden.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorganges nicht manipuliert oder ausgeschaltet wird und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Turm

Turmparameter

Max. Liftweg

0 ... [235] mm

Eingabe der tiefsten zulässigen Liftposition. Eine Lifthöhe von **0 mm** entspricht der "Ruheposition", d.h. der Lift ist ganz nach oben gefahren.

Min. Becherradius

1.0 ... 100.0 mm, [aus]

Definition des minimalen Radius, den die auf dem Rack verwendeten Becher aufweisen müssen. Wird der Lift auf die Arbeitsposition gefahren, werden die in der Racktabelle für allgemeine Probenpositionen und Spezialbecher definierten Becherradien mit dem **Min. Becherradius** verglichen. Wird dieser minimale Becherradius unterschritten, wird der Ablauf gestoppt und eine Fehlermeldung ausgegeben. Mit **aus** erfolgt keine Überprüfung.

Liftgeschwindigkeit

3 ... [25] mm/s

Liftgeschwindigkeit für die manuelle Bedienung.

Swing Head

Diese Parameter werden nur angezeigt, wenn ein Swing Head am Turm montiert ist.

Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Swing Head.

Schwenkposition

[0] ... 235 mm

Die für alle 4 externen Positionen gültige Liftposition, auf welcher der Schwenkarm zu den externen Positionen dreht.

Spülposition

[0] ... 235 mm

Die für alle 4 externen Positionen gültige Spülposition.

Konfiguration

Öffnen des Dialogfensters **Konfiguration Schwenkarm** (siehe *Konfiguration Schwenkarm*), in dem die Eigenschaften des Schwenkarmes bearbeitet werden können.

Tabelle für externe Positionen

In der Tabelle werden die Eigenschaften für die 4 möglichen externen Positionen des am Swing Head montierten Schwenkarms angezeigt. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar.

Externe Position

Nummer der externen Position.

Winkel [°]

Schwenkwinkel für externe Position.

Arbeitsposition [mm]

Arbeitsposition für externe Position.

Bearbeiten

Öffnen des Dialogfensters **Externe Position #** (siehe *Externe Position*), in dem die Parameter für die in der Tabelle ausgewählte externe Position bearbeitet werden können.

Konfiguration Schwenkarm

Im Dialogfenster **Konfiguration Schwenkarm** können die spezifischen Einstellungen für jeden an einem Swing Head montierten Schwenkarm vorgenommen werden.

Achsenabstand

100.0 ... 300.0 mm

[166.0 mm] (778 Sample Processor, 814 USB Sample Processor XL)

[196.0 mm] (789 Robotic Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL)

Entfernung zwischen der Drehachse des Probenracks und der Schwenkachse des Schwenkarmes.

Schwenkarm-Offset

-270.0 ... 270.0 °

[0.0 °] (beim Titrations-Schwenkarm)

[8.0 °] (beim Transfer-Schwenkarm)

[-8.0 °] (beim Makro-Schwenkarm)

Versatz des Schwenkwinkels für spezifisches Schwenkarm-Modell.

Max. Schwenkbereich

0.0 ... 330.0 °

[**84.0 °**] (beim Titrations-Schwenkarm)

[**117.0 °**] (beim Transfer-Schwenkarm)

[**73.0 °**] (beim Makro-Schwenkarm)

Maximal nutzbarer Schwenkbereich für spezifisches Schwenkarm-Modell. Jedes Schwenkarm-Modell weist auf Grund seiner Konstruktion einen anderen Wert auf. Dieser kann bei Bedarf auch verkleinert werden.

Schwenkradius

30.0 ... 300.0 mm

[**110.0 mm**] (beim Titrations-Schwenkarm)

[**112.0 mm**] (beim Transfer-Schwenkarm)

[**127.0 mm**] (beim Makro-Schwenkarm)

Der Schwenkradius ist von der Länge des Schwenkarmes abhängig und ist zusammen mit dem Achsenabstand die wichtigste Grösse zum präzisen Anfahren einer Rackposition.

Drehwinkel-Offset

-270.0 ... [0.0] ... 270.0 °

Versatz von Mitte Turm zur Mitte des Schwenkarmes, der aber normalerweise nicht geändert werden muss. Falls ein Schwenkarm seitlich versetzt am Turm montiert werden sollte, kann dieser Wert bei der Rack-Justierung durch den Service-Techniker ermittelt werden.

Schwenkrichtung


+ (Drehung im Uhrzeigersinn), – (Drehung im Gegenuhrzeigersinn)

Die Schwenkrichtung des Schwenkarmes hängt vom Schwenkarmtyp ab.

Bei einem 2-Turm-Modell muss der Schwenkarm an Turm 1 rechtsschwenkend, d.h. "–" und an Turm 2 linksschwenkend "+" montiert werden.

Externe Position

Im Dialogfenster **Externe Position #** können für jede externe Position ein Schwenkwinkel sowie eine spezifische Arbeitsposition definiert werden. Dreh- und Spülposition können nur für alle 4 externen Positionen gemeinsam definiert werden (siehe Eigenschaften Turm #). Für externe Positionen kann keine Spezialposition definiert werden.

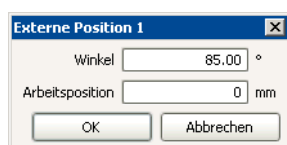

Winkel

Offset...[85.00 °]...(Offset + max. Schwenkbereich)

Definition des Schwenkwinkels für die ausgewählte externe Position. Der Offset setzt sich aus einem konstruktionsabhängigen Winkel (ca. 8-9°) und dem Schwenkarm-Offset aus den Schwenkarm-Eigenschaften (siehe *Konfiguration Schwenkarm*) zusammen. Der maximale Schwenkbereich wird ebenfalls in Schwenkarm-Eigenschaften definiert.

Arbeitsposition

[0] ... 235 mm

Definition der Arbeitsposition für die ausgewählte externe Position.

Rack

Auf der Registerkarte **Rack** werden die rackspezifischen Daten des aufgesetzten Racks angezeigt.

The screenshot shows a software window titled "Eigenschaften - 814 USB Sample Processor - 814_1". It has a tabbed interface with "Allgemein", "Turm 1", and "Turm 2". The "Allgemein" tab is active, and within it, the "Rack" sub-tab is selected. The "Rack" sub-tab contains several input fields: "Rackname" with the value "6.2041.340", "Rackcode" with "001000", "Anzahl Positionen" with "24", and "Drehgeschwindigkeit" with "20 °/s". To the right of these fields are two buttons: "Rackdaten" and "Rack initialisieren". At the bottom of the window are "OK" and "Abbrechen" buttons.

Rackname

Anzeige des Namens des aufgelegten Racks. Ist kein Rack aufgelegt, wird "-----" angezeigt.

Rackcode

Anzeige des Rackcodes des aufgelegten Racks. Der Rackcode entspricht der Magnetanordnung auf der Unterseite des Racks und wird durch den Sample Processor zur Rackerkennung ausgelesen. Ist kein Rack aufgelegt, ist die Anzeige leer.

Anzahl Positionen

Anzeige der Anzahl Positionen auf dem Rack. Ist kein Rack aufgelegt, ist die Anzeige leer.

Drehgeschwindigkeit

3 ... [20] °/s

Drehgeschwindigkeit des Probenracks für die manuelle Bedienung.

Rackdaten

Öffnen des Dialogfenster **Rackdaten** (siehe *Konfiguration - Unterfenster Rackdaten - Rackeigenschaften*) bzw. **Rackdaten (774)**, in dem die Daten des aufgesetzten Racks angezeigt und bearbeitet werden können.

Rack initialisieren

Initialisieren des aufgesetzten Racks. Dabei werden Rack, Lift und Schwenkarm zurückgesetzt, der Rackcode ausgelesen und die entsprechenden Rackdaten in den Sample Processor übertragen.

MSB



Aufforderung für Dosierervorbereitung

Auswahl, wann die Aufforderung zur Durchführung des Befehls **PREP** (Vorbereiten) für den am MSB angeschlossenen Dosierer angezeigt werden soll.

Beim Programmstart

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, erscheint bei jedem Programmstart die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Beim Aufsetzen einer Wechsel-/Dosiereinheit

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, erscheint beim Aufsetzen der Wechseleinheit auf den Titrande oder Dosimat bzw. beim Aufsetzen der Dosiereinheit auf den Dosino die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Zeitintervall

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, erscheint nach dem nachstehend definierten Zeitintervall die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

alle

0.1 ... [12] ... 999.9 h

Zeitintervall, nach dem die Aufforderung zur Dosierervorbereitung erscheint.

Angeschlossene Geräte

Hier werden Angaben zu den folgenden, am MSB-Anschluss angeschlossenen Peripheriegeräte angezeigt:

- **Dosierer**
Für die angeschlossenen Dosierer werden der **Dosierertyp** und für Dosierer des Typs 8xx zusätzlich die **Dosierer-Seriennummer** angezeigt.
- **Rührer**
Für die angeschlossenen Rührer werden der **Rührertyp** und die **Rührer-Seriennummer** angezeigt.
- **Remote-Box**
Für eine angeschlossene Remote-Box können keine Eigenschaften angezeigt werden.

GLP

Datum GLP-Test

Datumsauswahl

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden.

Kommentar GLP-Test

1000 Zeichen, [leer]

Kommentar zum GLP-Test.

GLP-Gültigkeit überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Hinweis

Diese Option kann erst eingeschaltet werden, wenn unter **Datum GLP-Test** ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

0 ... [999] Tage

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Intervall eingegeben, wird das Datum für **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nächster GLP-Test

Datumsauswahl, [Datum GLP-Test + 999 Tage]

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Aktion

Ist das Zeitintervall für den GLP-Test abgelaufen, wird sowohl beim Starttest wie auch beim Befehlsablauf eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren

Die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die

Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen

Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **<OK>** quittiert werden.

778/789 Sample Processor

Die Parameter für die Geräte **778 Sample Processor** und **789 Robotic Sample Processor XL** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein**
Allgemeine Geräteinformationen wie Geräte-Name, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- **Turm #**
Eigenschaften von Turm 1 und Turm 2 (falls vorhanden).
- **Rack**
Angaben zum aufgesetzten Rack.
- **MSB #**
Eigenschaften des MSB-Anschlusses 1...3 und der daran angeschlossenen Peripheriegeräte.
- **RS232**
Auswahl der seriellen Schnittstelle, an welcher das Gerät angeschlossen ist.
- **GLP**
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

Allgemein

Geräte-Name

50 Zeichen, [Gerätetypnummer_#]

Vom Anwender beliebig wählbare Bezeichnung für das Gerät.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, die durch *tiamo* selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Betriebsstunden

Anzeige der Anzahl Betriebsstunden (nur für die Geräte 778, 789, 814 und 815).

Bemerkungen

1000 Zeichen, [leer]

Bemerkungen zum Gerät.

Verbindung trennen

Diese Schaltfläche wird nur bei Waagen oder einem Barcodeleser angezeigt. Damit das Gerät aus der Geräteliste gelöscht werden kann, muss die Verbindung getrennt werden.

Neue Programmversion laden

Wird beim Anschluss eines Gerätes festgestellt, dass dieses eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, muss diese aktualisiert werden. Dazu muss das Gerät in der Gerätetabelle ausgewählt und mit **Bearbeiten, Eigenschaften** das Eigenschaftsfenster für dieses Gerät geöffnet werden. Auf der Registerkarte **Allgemein** ist dann die Schaltfläche **[Aktualisieren]** aktiv.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**.

Alte Version

Anzeige der alten Geräteprogrammversion.

Neue Version

Anzeige der neu zu ladenden Geräteprogrammversion.

Laden

Neue Geräteprogrammversion laden.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorganges nicht manipuliert oder ausgeschaltet wird und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Turm

Externe Position	Winkel [°]	Arbeitsposition [mm]
1	85.00	0
2	85.00	0
3	85.00	0
4	85.00	0

Turmparameter

Max. Liftweg

0 ... [235] mm

Eingabe der tiefsten zulässigen Liftposition. Eine Lifthöhe von **0 mm** entspricht der "Ruheposition", d.h. der Lift ist ganz nach oben gefahren.

Min. Becherradius

1.0 ... 100.0 mm, [aus]

Definition des minimalen Radius, den die auf dem Rack verwendeten Becher aufweisen müssen. Wird der Lift auf die Arbeitsposition gefahren, werden die in der Racktabelle für allgemeine Probenpositionen und Spezialbecher definierten Becherradien mit dem **Min. Becherradius** verglichen. Wird dieser minimale Becherradius unterschritten, wird der Ablauf gestoppt und eine Fehlermeldung ausgegeben. Mit **aus** erfolgt keine Überprüfung.

Liftgeschwindigkeit

3 ... [25] mm/s

Liftgeschwindigkeit für die manuelle Bedienung.

Swing Head

Diese Parameter werden nur angezeigt, wenn ein Swing Head am Turm montiert ist.

Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Swing Head.

Schwenkposition

[0] ... 235 mm

Die für alle 4 externen Positionen gültige Liftposition, auf welcher der Schwenkarm zu den externen Positionen dreht.

Spülposition

[0] ... 235 mm

Die für alle 4 externen Positionen gültige Spülposition.

Konfiguration

Öffnen des Dialogfensters **Konfiguration Schwenkarm** (siehe *Konfiguration Schwenkarm*), in dem die Eigenschaften des Schwenkarmes bearbeitet werden können.

Tabelle für externe Positionen

In der Tabelle werden die Eigenschaften für die 4 möglichen externen Positionen des am Swing Head montierten Schwenkarms angezeigt. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar.

Externe Position

Nummer der externen Position.

Winkel [°]

Schwenkwinkel für externe Position.

Arbeitsposition [mm]

Arbeitsposition für externe Position.

Bearbeiten

Öffnen des Dialogfensters **Externe Position #** (siehe *Externe Position*), in dem die Parameter für die in der Tabelle ausgewählte externe Position bearbeitet werden können.

Konfiguration Schwenkarm

Im Dialogfenster **Konfiguration Schwenkarm** können die spezifischen Einstellungen für jeden an einem Swing Head montierten Schwenkarm vorgenommen werden.

Achsenabstand

100.0 ... 300.0 mm

[**166.0 mm**] (778 Sample Processor, 814 USB Sample Processor XL)

[**196.0 mm**] (789 Robotic Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL)

Entfernung zwischen der Drehachse des Probenracks und der Schwenkachse des Schwenkarmes.

Schwenkarm-Offset

-270.0 ... 270.0 °

[**0.0 °**] (beim Titrations-Schwenkarm)

[**8.0 °**] (beim Transfer-Schwenkarm)

[**-8.0 °**] (beim Makro-Schwenkarm)

Versatz des Schwenkwinkels für spezifisches Schwenkarm-Modell.

Max. Schwenkbereich

0.0 ... 330.0 °

[**84.0 °**] (beim Titrations-Schwenkarm)

[**117.0 °**] (beim Transfer-Schwenkarm)

[**73.0 °**] (beim Makro-Schwenkarm)

Maximal nutzbarer Schwenkbereich für spezifisches Schwenkarm-Modell. Jedes Schwenkarm-Modell weist auf Grund seiner Konstruktion einen anderen Wert auf. Dieser kann bei Bedarf auch verkleinert werden.

Schwenkradius

30.0 ... 300.0 mm

[**110.0 mm**] (beim Titrations-Schwenkarm)

[**112.0 mm**] (beim Transfer-Schwenkarm)

[**127.0 mm**] (beim Makro-Schwenkarm)

Der Schwenkradius ist von der Länge des Schwenkarmes abhängig und ist zusammen mit dem Achsenabstand die wichtigste Grösse zum präzisen Anfahren einer Rackposition.

Drehwinkel-Offset

-270.0 ... [0.0] ... 270.0 °

Versatz von Mitte Turm zur Mitte des Schwenkarmes, der aber normalerweise nicht geändert werden muss. Falls ein Schwenkarm seitlich versetzt am Turm montiert werden sollte, kann dieser Wert bei der Rack-Justierung durch den Service-Techniker ermittelt werden.

Schwenkrichtung


+ (Drehung im Uhrzeigersinn), **-** (Drehung im Gegenuhrzeigersinn)

Die Schwenkrichtung des Schwenkarmes hängt vom Schwenkarmtyp ab.

Bei einem 2-Turm-Modell muss der Schwenkarm an Turm 1 rechtsschwenkend, d.h. **"-"** und an Turm 2 linksschwenkend **"+"** montiert werden.

Externe Position

Im Dialogfenster **Externe Position #** können für jede externe Position ein Schwenkwinkel sowie eine spezifische Arbeitsposition definiert werden. Dreh- und Spülposition können nur für alle 4 externen Positionen gemeinsam definiert werden (siehe Eigenschaften Turm #). Für externe Positionen kann keine Spezialposition definiert werden.

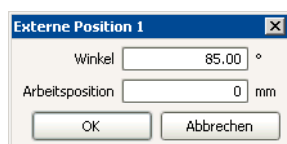

Winkel

Offset...[85.00 °]...(Offset + max. Schwenkbereich)

Definition des Schwenkwinkels für die ausgewählte externe Position. Der Offset setzt sich aus einem konstruktionsabhängigen Winkel (ca. 8-9°) und dem Schwenkarm-Offset aus den Schwenkarm-Eigenschaften (siehe *Konfiguration Schwenkarm*) zusammen. Der maximale Schwenkbereich wird ebenfalls in Schwenkarm-Eigenschaften definiert.

Arbeitsposition

[0] ... 235 mm

Definition der Arbeitsposition für die ausgewählte externe Position.

Rack

Auf der Registerkarte **Rack** werden die rackspezifischen Daten des aufgesetzten Racks angezeigt.

Rackname

Anzeige des Namens des aufgelegten Racks. Ist kein Rack aufgelegt, wird "-----" angezeigt.

Rackcode

Anzeige des Rackcodes des aufgelegten Racks. Der Rackcode entspricht der Magnetanordnung auf der Unterseite des Racks und wird durch den Sample Processor zur Rackerkennung ausgelesen. Ist kein Rack aufgelegt, ist die Anzeige leer.

Anzahl Positionen

Anzeige der Anzahl Positionen auf dem Rack. Ist kein Rack aufgelegt, ist die Anzeige leer.

Drehgeschwindigkeit

3 ... [20] °/s

Drehgeschwindigkeit des Probenracks für die manuelle Bedienung.

Rackdaten

Öffnen des Dialogfenster **Rackdaten** (siehe *Konfiguration - Unterfenster Rackdaten - Rackeigenschaften*) bzw. **Rackdaten (774)**, in dem die Daten des aufgesetzten Racks angezeigt und bearbeitet werden können.

Rack initialisieren

Initialisieren des aufgesetzten Racks. Dabei werden Rack, Lift und Schwenkarm zurückgesetzt, der Rackcode ausgelesen und die entsprechenden Rackdaten in den Sample Processor übertragen.

MSB



Aufforderung für Dosierervorbereitung

Auswahl, wann die Aufforderung zur Durchführung des Befehls **PREP** (Vorbereiten) für den am MSB angeschlossenen Dosierer angezeigt werden soll.

Beim Programmstart

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, erscheint bei jedem Programmstart die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Beim Aufsetzen einer Wechsel-/Dosiereinheit

[ein], aus

Ist diese Option eingeschaltet, erscheint beim Aufsetzen der Wechseleinheit auf den Titrande oder Dosimat bzw. beim Aufsetzen der Dosiereinheit auf den Dosino die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Zeitintervall

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, erscheint nach dem nachstehend definierten Zeitintervall die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

alle

0.1 ... [12] ... 999.9 h


Zeitintervall, nach dem die Aufforderung zur Dosierervorbereitung erscheint.

Angeschlossene Geräte

Hier werden Angaben zu den folgenden, am MSB-Anschluss angeschlossenen Peripheriegeräte angezeigt:

- **Dosierer**
Für die angeschlossenen Dosierer werden der **Dosierertyp** und für Dosierer des Typs 8xx zusätzlich die **Dosierer-Seriennummer** angezeigt.
- **Rührer**
Für die angeschlossenen Rührer werden der **Rührertyp** und die **Rührer-Seriennummer** angezeigt.
- **Remote-Box**
Für eine angeschlossene Remote-Box können keine Eigenschaften angezeigt werden.

RS 232

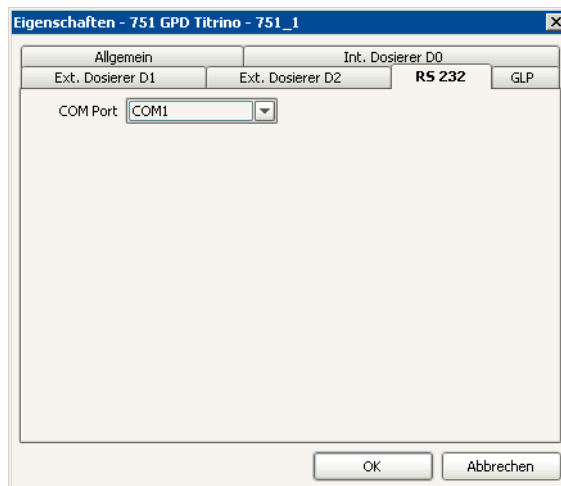


COM Port

COM1, COM2, ..., [erster freier COM Port]

Auswahl der seriellen Schnittstelle am PC, an welcher das Gerät angeschlossen ist.

GLP

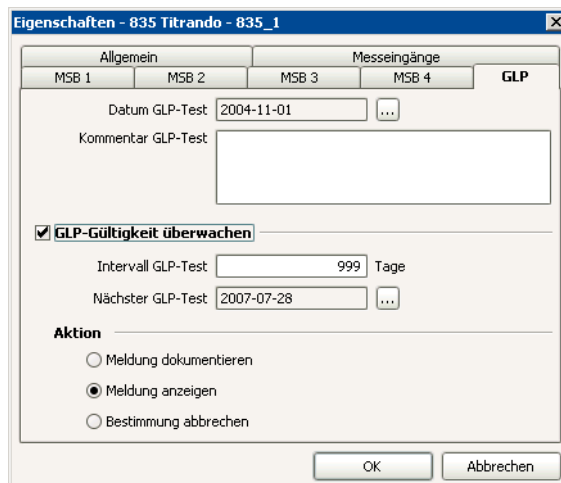

Datum GLP-Test

Datumsauswahl

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen) ausgewählt werden.

Kommentar GLP-Test

1000 Zeichen, [leer]

Kommentar zum GLP-Test.

GLP-Gültigkeit überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Hinweis

Diese Option kann erst eingeschaltet werden, wenn unter **Datum GLP-Test** ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

0 ... [999] Tage

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Intervall eingegeben, wird das Datum für **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nächster GLP-Test

Datumsauswahl, [Datum GLP-Test + 999 Tage]

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Aktion

Ist das Zeitintervall für den GLP-Test abgelaufen, wird sowohl beim Starttest wie auch beim Befehlsablauf eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren

Die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen

Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **<OK>** quittiert werden.

730 Sample Changer

Die Parameter für das Gerät **730 Sample Changer** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein**
Allgemeine Geräteinformationen wie Geräteiname, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- **Türme**
Eigenschaften von Turm 1 und Turm 2 (falls vorhanden).
- **Rack**
Angaben zum aufgesetzten Rack.
- **Dosierer**
Eigenschaften des Anschlusses und der daran angeschlossenen Dosierer.
- **RS232**
Auswahl der seriellen Schnittstelle, an welcher das Gerät angeschlossen ist.
- **GLP**
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

Allgemein

Gerätename

50 Zeichen, [Gerätetypnummer_#]

Vom Anwender beliebig wählbare Bezeichnung für das Gerät.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, die durch *tiamo* selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Betriebsstunden

Anzeige der Anzahl Betriebsstunden (nur für die Geräte 778, 789, 814 und 815).

Bemerkungen

1000 Zeichen, [leer]

Bemerkungen zum Gerät.

Verbindung trennen

Diese Schaltfläche wird nur bei Waagen oder einem Barcodeleser angezeigt. Damit das Gerät aus der Geräteliste gelöscht werden kann, muss die Verbindung getrennt werden.

Neue Programmversion laden

Wird beim Anschluss eines Gerätes festgestellt, dass dieses eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, muss diese aktualisiert werden. Dazu muss das Gerät in der Gerätetabelle ausgewählt und mit **Bearbeiten, Eigenschaften** das Eigenschaftsfenster für dieses Gerät geöffnet werden. Auf der Registerkarte **Allgemein** ist dann die Schaltfläche **[Aktualisieren]** aktiv.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**.

Alte Version

Anzeige der alten Geräteprogrammversion.

Neue Version

Anzeige der neu zu ladenden Geräteprogrammversion.




Neue Geräteprogrammversion laden.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorganges nicht manipuliert oder ausgeschaltet wird und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Türme

Auf der Registerkarte **Türme** werden die Turmparameter für Turm 1 und Turm 2 (falls vorhanden) für den **730 Sample Changer** angezeigt. Sie können jedoch nicht editiert werden, sondern müssen via Tastatur am Gerät selber eingestellt werden.

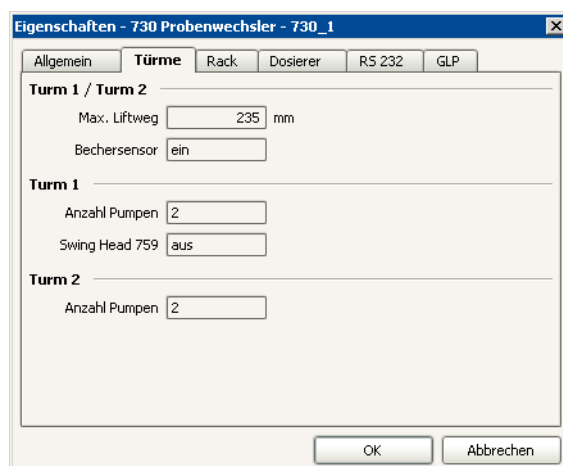

Turm 1 / Turm 2

Max. Liftweg

Anzeige der tiefsten zulässigen Liftposition für die beiden Türme. Eine Lifthöhe von **0 mm** entspricht der "Ruheposition", d.h. der Lift ist ganz nach oben gefahren.

Bechersensor

Anzeige, ob der Bechersensor für die beiden Türme ein- oder ausgeschaltet ist. Der Bechersensor prüft bei jedem Anfahren einer Probenposition, ob ein Becher vorhanden ist oder nicht.

Turm 1

Anzahl Pumpen

Anzeige, wie viele Pumpen an Turm 1 angeschlossen sind.

Swing Head 759

Anzeige, ob ein Swing Head an Turm 1 montiert ist.

Turm 2

Anzahl Pumpen

Anzeige, wie viele Pumpen an Turm 1 angeschlossen sind.

Hinweis

Ein Swing Head kann nur an Turm 1 montiert werden.

Rack

Auf der Registerkarte **Rack** werden die rackspezifischen Daten des aufgesetzten Racks angezeigt.

Rackname

Anzeige des Namens des aufgelegten Racks. Ist kein Rack aufgelegt, wird "-----" angezeigt.

Rackcode

Anzeige des Rackcodes des aufgelegten Racks. Der Rackcode entspricht der Magnetanordnung auf der Unterseite des Racks und wird durch den Sample Processor zur Rackerkennung ausgelesen. Ist kein Rack aufgelegt, ist die Anzeige leer.

Anzahl Positionen

Anzeige der Anzahl Positionen auf dem Rack. Ist kein Rack aufgelegt, ist die Anzeige leer.

Drehgeschwindigkeit

3 ... [20] °/s

Drehgeschwindigkeit des Probenracks für die manuelle Bedienung.


Rackdaten

Öffnen des Dialogfenster **Rackdaten** (siehe *Konfiguration - Unterfenster Rackdaten - Rackeigenschaften*) bzw. **Rackdaten (774)**, in dem die Daten des aufgesetzten Racks angezeigt und bearbeitet werden können.

Rack initialisieren

Initialisieren des aufgesetzten Racks. Dabei werden Rack, Lift und Schwenkarm zurückgesetzt, der Rackcode ausgelesen und die entsprechenden Rackdaten in den Sample Processor übertragen.

Dosierer

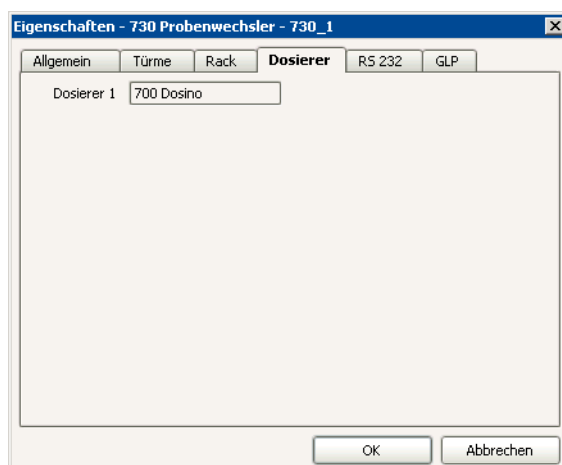


Anzeige der Anzahl und Art der am **730 Sample Changer** oder **774 Oven Sample Processor** angeschlossenen Dosierer. Es können maximal 12 Dosierer des Typs **685 Dosimat** oder **700 Dosino** angeschlossen werden.

Hinweis

Das Anschliessen der Dosierer ist in der Gebrauchsanweisung zum 730 Sample Changer bzw. 774 Oven Sample Processor beschrieben. Wenn kein Dosierer angeschlossen ist, ist die Registerkarte leer.

RS 232

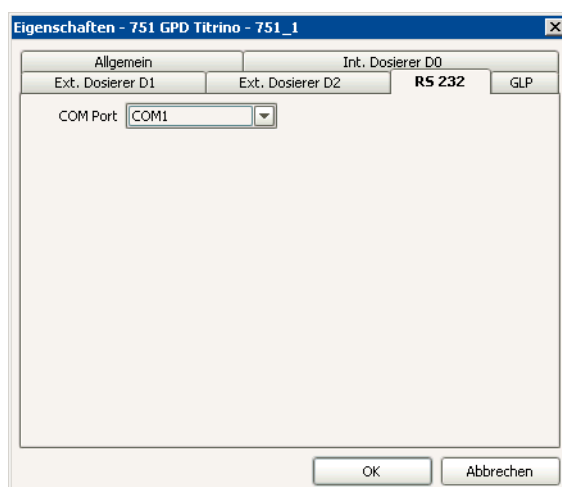

COM Port

COM1, COM2, ..., [erster freier COM Port]

Auswahl der seriellen Schnittstelle am PC, an welcher das Gerät angeschlossen ist.

GLP

Datum GLP-Test

Datumsauswahl

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden.

Kommentar GLP-Test

1000 Zeichen, [leer]

Kommentar zum GLP-Test.

GLP-Gültigkeit überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Hinweis

Diese Option kann erst eingeschaltet werden, wenn unter **Datum GLP-Test** ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

0 ... [999] Tage

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Intervall eingegeben, wird das Datum für **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nächster GLP-Test

Datumsauswahl, [Datum GLP-Test + 999 Tage]

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Aktion

Ist das Zeitintervall für den GLP-Test abgelaufen, wird sowohl beim Starttest wie auch beim Befehlsablauf eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren

Die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die

Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen

Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **<OK>** quittiert werden.

774 Oven Sample Processor

Die Parameter für das Gerät **774 Oven Sample Processor** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein**
Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätename, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- **Turm**
Eigenschaften des Turmes
- **Rack**
Angaben zum aufgesetzten Rack.
- **Dosierer**
Eigenschaften des Anschlusses und der daran angeschlossenen Dosierer.
- **Gas**
Anzeige der Parameter für den Gasfluss.
- **Ofen**
Anzeige der Ofenparameter.
- **RS232**
Auswahl der seriellen Schnittstelle, an welcher das Gerät angeschlossen ist.
- **GLP**
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

Allgemein

Gerätename

50 Zeichen, [Gerätetypnummer_#]

Vom Anwender beliebig wählbare Bezeichnung für das Gerät.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, die durch *tiamo* selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Betriebsstunden

Anzeige der Anzahl Betriebsstunden (nur für die Geräte 778, 789, 814 und 815).

Bemerkungen

1000 Zeichen, [leer]

Bemerkungen zum Gerät.

Verbindung trennen

Diese Schaltfläche wird nur bei Waagen oder einem Barcodeleser angezeigt. Damit das Gerät aus der Geräteliste gelöscht werden kann, muss die Verbindung getrennt werden.

Neue Programmversion laden

Wird beim Anschluss eines Gerätes festgestellt, dass dieses eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, muss diese aktualisiert werden. Dazu muss das Gerät in der Gerätetabelle ausgewählt und mit **Bearbeiten, Eigenschaften** das Eigenschaftsfenster für dieses Gerät geöffnet werden. Auf der Registerkarte **Allgemein** ist dann die Schaltfläche **[Aktualisieren]** aktiv.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**.

Alte Version

Anzeige der alten Geräteprogrammversion.

Neue Version

Anzeige der neu zu ladenden Geräteprogrammversion.

Laden

Neue Geräteprogrammversion laden.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorganges nicht manipuliert oder ausgeschaltet wird und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Türme

Auf der Registerkarte **Türme** werden die Turmparameter für den Turm am **774 Oven Sample Processor** angezeigt. Sie können jedoch nicht editiert werden, sondern müssen via Tastatur am Gerät selber eingestellt werden.

Max. Liftweg

Anzeige der tiefsten zulässigen Liftposition für des Turmes. Eine Lifthöhe von **0 mm** entspricht der "Ruheposition", d.h. der Lift ist ganz nach oben gefahren.

Bechersensor

Anzeige, ob der Bechersensor für den Turm ein- oder ausgeschaltet ist. Der Bechersensor prüft bei jedem Anfahren einer Probenposition, ob ein Becher vorhanden ist oder nicht.

Rack

Auf der Registerkarte **Rack** werden die rackspezifischen Daten des aufgesetzten Racks angezeigt.

Rackname

Anzeige des Namens des aufgelegten Racks. Ist kein Rack aufgelegt, wird "-----" angezeigt.

Rackcode

Anzeige des Rackcodes des aufgelegten Racks. Der Rackcode entspricht der Magnetanordnung auf der Unterseite des Racks und wird durch den

Sample Processor zur Rackerkennung ausgelesen. Ist kein Rack aufgelegt, ist die Anzeige leer.

Anzahl Positionen

Anzeige der Anzahl Positionen auf dem Rack. Ist kein Rack aufgelegt, ist die Anzeige leer.

Drehgeschwindigkeit

3 ... [20] °/s

Drehgeschwindigkeit des Probenracks für die manuelle Bedienung.

Rackdaten

Öffnen des Dialogfenster **Rackdaten** (siehe *Konfiguration - Unterfenster Rackdaten - Rackeigenschaften*) bzw. **Rackdaten (774)**, in dem die Daten des aufgesetzten Racks angezeigt und bearbeitet werden können.

Rack initialisieren

Initialisieren des aufgesetzten Racks. Dabei werden Rack, Lift und Schwenkarm zurückgesetzt, der Rackcode ausgelesen und die entsprechenden Rackdaten in den Sample Processor übertragen.

Rackeigenschaften bearbeiten (774)

Rackname

Anzeige des Namens des aufgesetzten Racks. Ist kein Rack aufgesetzt, wird "-----" angezeigt.

Rackcode

Anzeige des Rackcodes des aufgesetzten Racks. Der Rackcode entspricht der Magnetanordnung auf der Unterseite des Racks und wird durch den Sample Processor zur Rackerkennung ausgelesen. Ist kein Rack aufgesetzt, ist die Anzeige leer.

Anzahl Positionen

Anzeige der Anzahl Positionen des aufgesetzten Racks. Ist kein Rack aufgesetzt, ist die Anzeige leer.

Die Parameter für das aufgesetzte Rack werden auf den folgenden 2 Registerkarten definiert:

- **Liftpositionen**
Definition der Arbeits-, Spül-, Dreh- und Spezialposition für Turm 1.
- **Spezialbecher**
Anzeige des Spezialbechers für das aufgesetzte Rack.

Liftpositionen

Turm 1

Definition der Liftpositionen für Turm 1. Diese gelten für alle Rackpositionen ausser derjenigen, welche als Spezialbecher definiert ist.

Arbeitsposition

0 ... [83] ... 100 mm

Arbeitsposition für Lift 1. Auf dieser Liftposition sind Elektroden, Rührer und Bürettenstippen optimal zum Arbeiten positioniert.

Spülposition

[0] ... 100 mm

Spülposition für Lift 1. Diese Liftposition wird zum Spülen der Elektroden verwendet.

Drehposition

[0] ... 100 mm

Drehposition für Lift 1. Bei jeder Drehbewegung des Racks wird der Lift auf diese Position gefahren, sofern er sich auf einer niedrigeren Liftposition befindet. Befindet sich der Lift auf einer höheren Position als der hier definierten, erfolgt die Drehbewegung auf der aktuellen Liftposition. Die Drehposition muss also so gewählt werden, dass jederzeit ein sicheres Drehen über das gesamte Rack möglich ist.

Spezialposition

[0] ... 100 mm

Spezialposition für Lift 1. Diese zusätzlich definierbare Position kann z.B. beim Pipettieren zum knappen Eintauchen in die Probenlösung verwendet werden.

Spezialbecher


Spezialbecher

Anzeige der Nummer des Spezialbeckers für das Rack.

Rackposition

Anzeige der Nummer der Rackposition für den Spezialbecher.

Dosierer

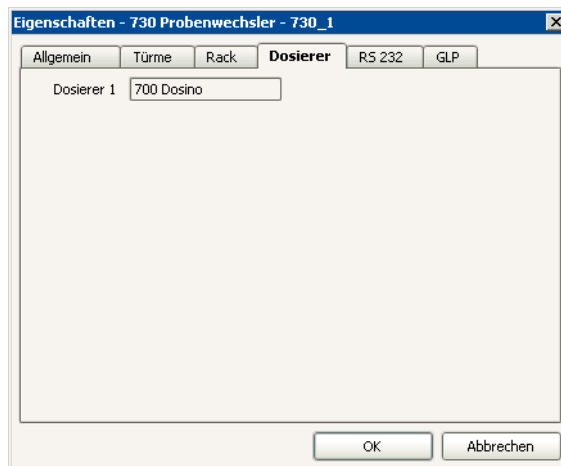


Anzeige der Anzahl und Art der am **730 Sample Changer** oder **774 Oven Sample Processor** angeschlossenen Dosierer. Es können maximal 12 Dosierer des Typs **685 Dosimat** oder **700 Dosino** angeschlossen werden.

Hinweis

Das Anschliessen der Dosierer ist in der Gebrauchsanweisung zum 730 Sample Changer bzw. 774 Oven Sample Processor beschrieben. Wenn kein Dosierer angeschlossen ist, ist die Registerkarte leer.

Ofen

Auf der Registerkarte **Ofen** werden die Ofenparameter für den **774 Oven Sample Processor** angezeigt. Die Parameter können jedoch nicht editiert werden, sie werden nur vom Gerät ausgelesen.

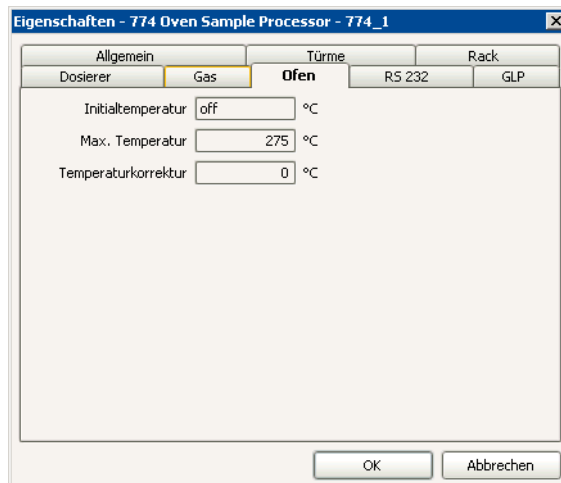

Initialtemperatur

Anzeige der am Gerät eingestellten Initialtemperatur. Die Angabe einer Initialtemperatur bewirkt, dass der Ofen nach dem Einschalten des Gerätes auf die eingestellte Temperatur aufgeheizt wird. **aus** bedeutet, dass der Ofen nicht eingeschaltet wird.

Max. Temperatur

Anzeige der am Gerät eingestellten maximalen Temperatur. Dieser Parameter ist eine Sicherheitseinstellung und soll die Überhitzung einer Probe verhindern. Falls der Ofen beim Aufheizen diese Temperatur erreicht, wird die Ofenheizung ausgeschaltet.

Temperaturkorrektur

Anzeige der am Gerät eingestellten Temperaturkorrektur. Dieser Parameter wirkt sich unmittelbar auf die Temperaturregelung aus und erlaubt es, diese zu justieren. Dadurch kann eine eventuell auftretende Temperaturdifferenz zwischen Ofen- und Proben temperatur ausgeglichen werden. Die angezeigte Temperatur ist die um diesen Wert korrigierte Ofentemperatur.

Gas

Auf der Registerkarte **Gas** werden die Parameter für den Gasfluss beim **774 Oven Sample Processor** angezeigt. Die Parameter können jedoch nicht editiert werden, sie werden nur vom Gerät ausgelesen.

The screenshot shows a software window titled "Eigenschaften - 774 Oven Sample Processor - 774_1". It has several tabs: "Allgemein", "Gas", "Türme", and "Rack". Under the "Gas" tab, there are sub-tabs: "Dosierer", "Gas", "Ofen", "RS 232", and "GLP". The "Gas" sub-tab is active. It contains the following fields: "Einheit für Gasfluss" with a dropdown menu showing "mL/min"; "Minimaler Gasfluss" with a text input field containing "0" followed by "mL/min"; "Maximaler Gasfluss" with a text input field containing "900" followed by "mL/min"; "Gastyp" with a text input field containing "Luft"; and "Korrekturfaktor" with a text input field containing "1". At the bottom right, there are "OK" and "Abbrechen" buttons.

Einheit für Gasfluss

Anzeige der am Gerät für die Gasflussanzeige ausgewählten Einheit (mL/min oder L/h).

Minimaler Gasfluss

Anzeige der am Gerät eingestellten unteren Warngrenze für den Gasfluss.

Maximaler Gasfluss

Anzeige der am Gerät eingestellten oberen Warngrenze für den Gasfluss.

Gastyp

Anzeige des Trägergases.

Korrekturfaktor

Anzeige der Korrektur für die Gasflussmessung bei "anderen" Gasen.

Hinweis

Bei der Unterschreitung des minimalen Gasflusses bzw. bei der Überschreitung des maximalen Gasflusses wird eine Fehlermeldung angezeigt.

RS 232

COM Port

COM1, COM2, ..., [erster freier COM Port]

Auswahl der seriellen Schnittstelle am PC, an welcher das Gerät angeschlossen ist.

GLP

Datum GLP-Test

Datumsauswahl

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen) ausgewählt werden.

Kommentar GLP-Test

1000 Zeichen, [leer]

Kommentar zum GLP-Test.

GLP-Gültigkeit überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Hinweis

Diese Option kann erst eingeschaltet werden, wenn unter **Datum GLP-Test** ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

0 ... [999] Tage

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Intervall eingegeben, wird das Datum für **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nächster GLP-Test

Datumsauswahl, [Datum GLP-Test + 999 Tage]

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Aktion

Ist das Zeitintervall für den GLP-Test abgelaufen, wird sowohl beim Starttest wie auch beim Befehlsablauf eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren

Die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen

Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **<OK>** quittiert werden.

Waagen

Die Parameter für eine **Waage** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein**
Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätenamen, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- **RS232**
Auswahl der seriellen Schnittstelle, an welcher das Gerät angeschlossen ist.
- **GLP**
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

Allgemein

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Eigenschaften - 835 Titrande - 835_1". It has several tabs at the top: "MSB 1", "MSB 2", "MSB 3", "MSB 4", and "GLP". The "Allgemein" tab is selected. Below the tabs, there's a sub-tab "Messeingänge". The main area contains several input fields: "Geräte name" with the value "835_1", "Gerätetyp" with "835 Titrande", "Programmversion" with "5.835.0011", "Geräte-Seriennummer" with "00011", and "Inbetriebnahme" with "2004-09-13 09:12:47 UTC+2". There is also a text area for "Bemerkungen". To the right of the "Programmversion" field is a button labeled "Aktualisieren". At the bottom of the dialog are "OK" and "Abbrechen" buttons.

Geräte name

50 Zeichen, [Gerätetypnummer_#]

Vom Anwender beliebig wählbare Bezeichnung für das Gerät.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, die durch *tiamo* selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Betriebsstunden

Anzeige der Anzahl Betriebsstunden (nur für die Geräte 778, 789, 814 und 815).

Bemerkungen

1000 Zeichen, [leer]

Bemerkungen zum Gerät.

Verbindung trennen

Diese Schaltfläche wird nur bei Waagen oder einem Barcodeleser angezeigt. Damit das Gerät aus der Geräteliste gelöscht werden kann, muss die Verbindung getrennt werden.

RS 232

COM Port

COM1, COM2, ..., [erster freier COM Port]

Auswahl der seriellen Schnittstelle am PC, an welcher das Gerät angeschlossen ist.

Baudrate

300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19200

Übertragungsgeschwindigkeit.

Datenbit

7, [8]

Anzahl Datenbits.

Parität

[Keine], Ungerade, Gerade

Art der Paritätsprüfung.

Stoppbit

[1], 2

Anzahl Stoppbits.

Handshake

[Kein], HW, SW

Art des Datenübertragungsprotokolls.

Max. Wartezeit

1000 ... [2000] ... 9000 ms

Maximale Wartezeit für den Empfang von Zeichen. Wird diese Zeit überschritten, wird der Empfang abgebrochen.

Abschlusszeichen für Senden

\0D, \0D\0A, \0D\0A\0A, \0D\0D\0A, ['leer']

Abschlusszeichen für Senden in Hexadecimalcode.

Abschlusszeichen für Empfangen

\0D, \0D\0A, \0D\0A\0A, \0D\0D\0A, ['leer']

Abschlusszeichen für Empfangen in Hexadecimalcode.

Zeichensatztable

[Cp437], Cp850, Cp851

Zeichensatztable, die für die Datenübertragung verwendet wird.

Verbindung testen

Testen der Verbindung zur Waage. Es erscheint das Dialogfenster **Verbindung testen**.

Verbindung testen

Um die Verbindung zu einer Waage zu testen, muss das Gerät in der Gerätetable ausgewählt und mit **Bearbeiten, Eigenschaften** das Eigenschaftensfenster für die-

ses Gerät geöffnet werden. Auf der Registerkarte **RS 232** muss dann die Schaltfläche **[Verbindung testen]** gedrückt werden.

Verbindung testen

Öffnen des Dialogfensters **Verbindung testen**.

Drücken Sie bitte die Print-Taste an der angeschlossenen Waage um die Verbindung zu testen. Ist die Verbindung ok, werden die Daten in die entsprechenden Felder eingefügt.

Gerätename

Einmass Einheit

ID1

ID2

OK Abbrechen

Wird die Print-Taste an der angeschlossenen Waage gedrückt, werden die von der Waage verfügbaren Daten in die folgenden Felder eingefügt:

Gerätename

Name der Waage.

Einmass

Einmass.

Einheit

Einmass-Einheit.

ID1

Probenidentifikation ID1.

ID2

Probenidentifikation ID2.

GLP

Allgemein Messeingänge

MSB 1 MSB 2 MSB 3 MSB 4 GLP

Datum GLP-Test 2004-11-01 ...

Kommentar GLP-Test

☒ GLP-Gültigkeit überwachen

Intervall GLP-Test 999 Tage

Nächster GLP-Test 2007-07-28 ...

Aktion

☐ Meldung dokumentieren

☒ Meldung anzeigen

☐ Bestimmung abbrechen

OK Abbrechen

Datum GLP-Test

Datumsauswahl

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden.

Kommentar GLP-Test

1000 Zeichen, [leer]

Kommentar zum GLP-Test.

GLP-Gültigkeit überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Hinweis

*Diese Option kann erst eingeschaltet werden, wenn unter **Datum GLP-Test** ein Datum eingegeben wurde.*

Intervall GLP-Test

0 ... [999] Tage

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Intervall eingegeben, wird das Datum für **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nächster GLP-Test

Datumsauswahl, [Datum GLP-Test + 999 Tage]

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Aktion

Ist das Zeitintervall für den GLP-Test abgelaufen, wird sowohl beim Starttest wie auch beim Befehlsablauf eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren

Die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen

Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **<OK>** quittiert werden.

Barcodeleser

Die Parameter für einen **Barcodeleser** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein**
Allgemeine Geräteinformationen wie Geräteiname, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- **Einstellungen**
Einstellungen für den Barcodeleser.
- **GLP**
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

Allgemein

Gerätename

50 Zeichen, [Gerätetypnummer_#]

Vom Anwender beliebig wählbare Bezeichnung für das Gerät.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, die durch *tiamo* selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Betriebsstunden

Anzeige der Anzahl Betriebsstunden (nur für die Geräte 778, 789, 814 und 815).

Bemerkungen

1000 Zeichen, [leer]

Bemerkungen zum Gerät.

Verbindung trennen

Diese Schaltfläche wird nur bei Waagen oder einem Barcodeleser angezeigt. Damit das Gerät aus der Geräteliste gelöscht werden kann, muss die Verbindung getrennt werden.

Einstellungen

Barcodeleser ID

Anzeige der Identifikation des Barcodelesers.

Eingabeziel

[**Aktives Eingabefeld**], **Methode**, **ID1...8**, **Einmass**, **Einheit**, **Probenposition**

Auswahl des Feldes, in das die Eingabe vom Barcodeleser eingefüllt werden soll.

Testen der Verbindung zum Barcodeleser. Es erscheint das Dialogfenster **Verbindung testen**.

Verbindung testen

Um die Verbindung zu einem Barcodeleser zu testen, muss das Gerät in der Gerätetabelle ausgewählt und mit **Bearbeiten, Eigenschaften** das Eigenschaftensfenster für dieses Gerät geöffnet werden. Auf der Registerkarte **Einstellungen** muss dann die Schaltfläche **[Verbindung testen]** gedrückt werden.

Öffnen des Dialogfensters **Verbindung testen**.

Wird mit dem Barcodeleser ein Strichcode eingelesen, werden die empfangenen Daten in die folgenden Felder eingefügt:

Barcodeleser ID

Identifikation des Barcodelesers.

Daten

Eingelesene Daten.

GLP

Datum GLP-Test

Datumsauswahl

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden.

Kommentar GLP-Test

1000 Zeichen, [leer]

Kommentar zum GLP-Test.

GLP-Gültigkeit überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Hinweis

Diese Option kann erst eingeschaltet werden, wenn unter **Datum GLP-Test** ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

0 ... [999] Tage

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Intervall eingegeben, wird das Datum für **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nächster GLP-Test

Datumsauswahl, [Datum GLP-Test + 999 Tage]

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Aktion

Ist das Zeitintervall für den GLP-Test abgelaufen, wird sowohl beim Starttest wie auch beim Befehlsablauf eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren

Die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die

Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen

Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **<OK>** quittiert werden.

RS232-Gerät

Die Parameter für ein generisches **RS232-Gerät** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- **Allgemein**
Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätename, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- **RS232**
Auswahl und Konfiguration der seriellen Schnittstelle, an welcher das Gerät angeschlossen ist.
- **GLP**
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

Allgemein

Gerätename

50 Zeichen, [Gerätetypnummer_#]

Vom Anwender beliebig wählbare Bezeichnung für das Gerät.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

Aktualisieren

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden**. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von *tiamo* unterstützte alte Programmversion hat, die durch *tiamo* selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Betriebsstunden

Anzeige der Anzahl Betriebsstunden (nur für die Geräte 778, 789, 814 und 815).

Bemerkungen

1000 Zeichen, [leer]

Bemerkungen zum Gerät.

Verbindung trennen

Diese Schaltfläche wird nur bei Waagen oder einem Barcodeleser angezeigt. Damit das Gerät aus der Geräteliste gelöscht werden kann, muss die Verbindung getrennt werden.

RS 232

COM Port

COM1, COM2, ..., [erster freier COM Port]

Auswahl der seriellen Schnittstelle am PC, an welcher das Gerät angeschlossen ist.

Baudrate

300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19200

Übertragungsgeschwindigkeit.

Datenbit

7, [8]

Anzahl Datenbits.

Parität

[Keine], Ungerade, Gerade

Art der Paritätsprüfung.

Stoppbit

[1], 2

Anzahl Stoppbits.

Handshake

[Kein], HW, SW

Art des Datenübertragungsprotokolls.

Max. Wartezeit

1000 ... [2000] ... 9000 ms

Maximale Wartezeit für den Empfang von Zeichen. Wird diese Zeit überschritten, wird der Empfang abgebrochen.

Abschlusszeichen für Senden

\0D, \0D\0A, \0D\0A\0A, \0D\0D\0A, ['leer']

Abschlusszeichen für Senden in Hexadecimalcode.

Abschlusszeichen für Empfangen

\0D, \0D\0A, \0D\0A\0A, \0D\0D\0A, ['leer']

Abschlusszeichen für Empfangen in Hexadecimalcode.

Zeichensatztabelle

[Cp437], Cp850, Cp851

Zeichensatztabelle, die für die Datenübertragung verwendet wird.

Zeichen einzeln senden

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird jedes Zeichen einzeln gesendet und danach die **Wartezeit** abgewartet, bis das nächste Zeichen gesendet wird.

Wartezeit

[0] ... 9000 ms

Wartezeit bis zum Senden des nächsten Zeichens.

Verbindung testen


Testen der Verbindung zum Gerät. Es erscheint das Dialogfenster **Verbindung testen**.

Verbindung testen

Um die Verbindung zu einem generischen RS232-Gerät zu testen, muss das Gerät in der Gerätetabelle ausgewählt und mit **Bearbeiten, Eigenschaften** das Eigenschaftfenster für dieses Gerät geöffnet werden. Auf der Registerkarte **RS 232** muss dann die Schaltfläche **[Verbindung testen]** gedrückt werden.

Verbindung testen

Öffnen des Dialogfensters **Verbindung testen**.

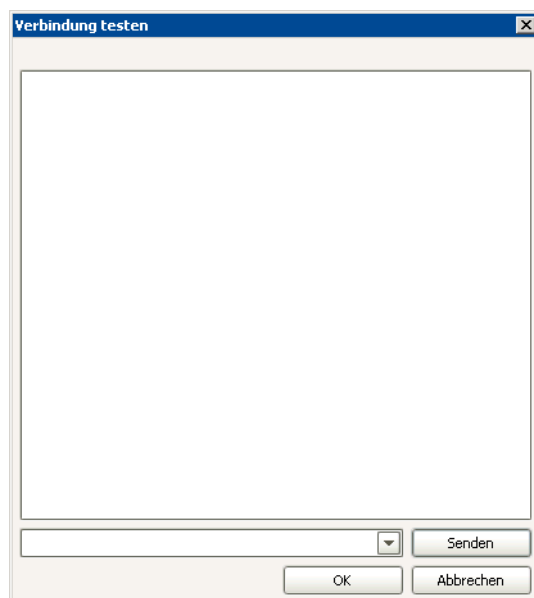

Im grossen Textfeld werden die an das Gerät gesendeten und vom Gerät empfangenen Meldungen angezeigt.

Senden

Senden der im Feld links neben der Schaltfläche eingegebenen Meldung an das Gerät.

GLP

Datum GLP-Test

Datumsauswahl

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden.

Kommentar GLP-Test

1000 Zeichen, [leer]

Kommentar zum GLP-Test.

GLP-Gültigkeit überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Hinweis

Diese Option kann erst eingeschaltet werden, wenn unter **Datum GLP-Test** ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

0 ... [999] Tage

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Intervall eingegeben, wird das Datum für **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nächster GLP-Test

Datumsauswahl, [Datum GLP-Test + 999 Tage]

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Aktion

Ist das Zeitintervall für den GLP-Test abgelaufen, wird sowohl beim Starttest wie auch beim Befehlsablauf eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren

Die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die

Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen

Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **<OK>** quittiert werden.

6.6 Unterfenster Titriermittel/Lösungen

6.6.1 Allgemeines

Unterfenster Titriermittel/Lösungen

Das Unterfenster **Titriermittel/Lösungen** enthält die Lösungstabelle mit allen automatisch erkannten und manuell hinzugefügten Titriermitteln und Hilfslösungen. Es kann im Programmteil **Konfiguration** als Bestandteil der Konfigurationsansicht oder (falls nicht auf der Oberfläche vorhanden) mit **Ansicht, Schnellzugriff** in einem separaten Fenster angezeigt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrößert und verkleinert und auch maximiert werden.

Titriermittel

Titriermittel werden als Lösungen für die Titrations-Befehle **DET**, **MET**, **SET** und **KFT** verwendet. Sie können in Wechsel- oder Dosiereinheiten eingesetzt werden.

Hilfslösungen

Hilfslösungen werden als Lösungen für die Dosier-Befehle **ADD** und **LQH** verwendet. Sie können in Wechsel- oder Dosiereinheiten eingesetzt werden.

Intelligente Wechseleinheiten (IWE) und Dosiereinheiten (IDE)

Intelligente Wechsel- und Dosiereinheiten besitzen einen Datenchip mit gespeicherten Lösungsdaten. Sie werden beim Aufsetzen auf intelligente Geräte (z.B. Titrand) automatisch erkannt und in der Lösungstabelle gespeichert.

Nicht intelligente Wechseleinheiten (WE) und Dosiereinheiten (DE)

Nicht intelligente Wechsel- und Dosiereinheiten müssen manuell zur Lösungstabelle hinzugefügt werden.

6.6.2 Lösungstabelle

Titriermittel/Lösungen									
	Lösungsname ▲	Konzentration	Zylindervolumen	Typ	Dosierer	Titer	Datum Titerbest.	Nächste Titerbestimmung	Verfallsdatum
▶ 1	CuSO ₄	0	20	IDE		1.333	2004-08-18 08:29:10 UTC+2		
2	EDTA	1.0000 mol/L	20	WE		1.0000	2004-11-01 15:32:57 UTC+1		
3	HClO ₄	0.1 mol/L	5	IWE	835_1 / D1	3	2004-05-12 11:10:38 UTC+2		
4	Test	1.00 mol/L	5	IWE	836_1 / D2	1.06	2003-12-05 06:38:05 UTC+1		

Inhalt

In der Lösungstabelle werden standardmässig die folgenden Informationen zu den automatisch erkannten oder manuell hinzugefügten Lösungen angezeigt:

Lösungsname

Name der Lösung.

Konzentration

Konzentration (Wert und Einheit) der Lösung.

Zylindervolumen

Zylindervolumen der Wechsel- oder Dosiereinheit in mL.

Typ

Typ der Wechseleinheit oder Dosiereinheit.

Dosierer

Gerätename und des Dosiereranschluss des Gerätes, auf dem die Wechsel- oder Dosiereinheit aufgesetzt ist (nur für intelligente Wechsel-/Dosiereinheiten).

Titer

Titer (Wert und Einheit) der Lösung.

Datum Titerbest.

Datum, an dem die letzte Titerbestimmung durchgeführt wurde.

Nächste Titerbest.

Datum, an dem die nächste Titerbestimmung durchgeführt werden soll. Ist die Titer-Überwachung eingeschaltet und das eingestellte Datum kleiner als das aktuelle Datum (d.h. die Titerbestimmung wurde noch nicht durchgeführt), wird das Datum mit roter Schrift dargestellt.

Verfallsdatum

Verfallsdatum der Lösung. Ist die Lösungs-Überwachung eingeschaltet und das eingestellte Datum kleiner als das aktuelle Datum (d.h. die Nutzungsdauer ist abgelaufen), wird das Datum mit roter Schrift dargestellt.

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Spaltenanzeige...** können weiteren Spalten aus den Lösungseigenschaften angezeigt werden.

Hinweise

Bei Zeilen mit roten Einträgen wird zusätzlich der Hintergrund der Zeilennummer rot markiert.

Tabellenansicht

Die Lösungstabelle ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermaßen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:**
Einstellen der Spaltenbreite
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:**
Einstellen der optimalen Spaltenbreite
- **Ziehen des Spaltentitels:**
Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mausursors auf dem Feld als Tooltip angezeigt.

Funktionen

Bearbeiten ▼

Das Menü **Bearbeiten** unterhalb der Lösungstabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu...

Manuelles Hinzufügen einer neuen Wechsel- oder Dosiereinheit.

Löschen

Löschen der ausgewählten Lösung.

Eigenschaften...

Bearbeiten der ausgewählten Lösung.

Spaltenanzeige...


Spalten für Lösungstabelle definieren.

Drucken (PDF)

Ausgabe der Lösungstabelle als PDF-Datei.

Spaltenanzeige

Mit **Bearbeiten, Spaltenanzeige** wird das Dialogfenster **Spaltenanzeige** geöffnet. Hier können die Spalten definiert werden, welche in der Lösungstabelle angezeigt werden sollen.

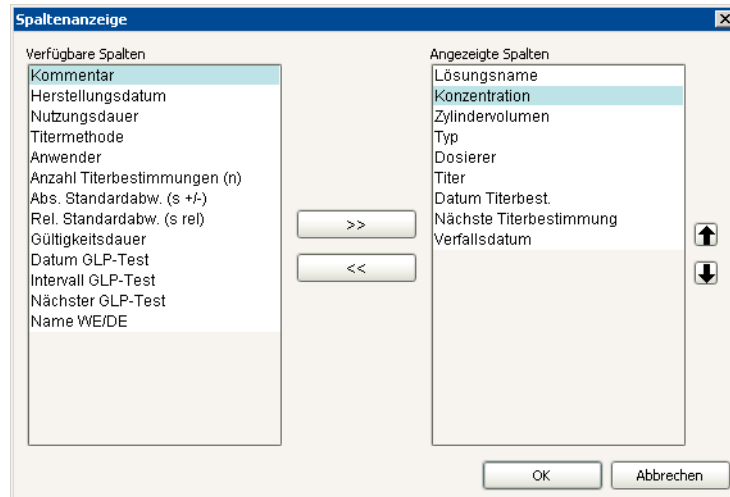


Verfügbare Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Lösungstabelle angezeigt werden können.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Lösungstabelle angezeigt werden. Defaultmässig werden die Spalten **Lösungsname, Konzentration, Zylindervolumen, Typ, Dosierer, Titer, Datum Titerbest., Nächste Titerbest.** und **Verfallsdatum** angezeigt. Die Spalte **Lösungsname** ist immer vorhanden und kann nicht entfernt werden.

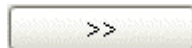

Hinzufügen der ausgewählten Spalte in die Tabelle.



Entfernen der ausgewählten Spalte aus der Tabelle.



Ändern der Reihenfolge der angezeigten Spalten durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach oben bzw. nach unten.

Neue Lösung hinzufügen

Lösungen in nicht intelligenten Wechseleinheiten (WE) und Dosiereinheiten (DE) ohne Datenchip müssen immer manuell mit **Bearbeiten, Neu, Wechseleinheit** oder **Bearbeiten, Neu, Dosiereinheit** die Lösungstabelle hinzugefügt werden. Dabei öffnet sich automatisch das Eigenschaftsfenster für die Konfiguration der Lösung. Nach dem Schliessen des Eigenschaftsfensters wird die Lösung mit den eingestellten Parametern in die Lösungstabelle eingetragen. Die Parameter können jederzeit mit **Bearbeiten, Eigenschaften** geändert werden.

Hinweis


Lösungen in intelligenten Wechseleinheiten 806 (IWE) oder Dosiereinheiten 807 (IDE) mit Datenchip müssen nur dann manuell hinzugefügt und konfiguriert werden, wenn sie auf Geräten aufgesetzt sind, welche die Daten nicht automatisch auslesen können (z.B. Titrino, Dosino 700).

Lösung löschen

Mit **Bearbeiten, Löschen** wird die in der Lösungstabelle ausgewählte Lösung gelöscht.

Lösungsliste drucken

Mit **Bearbeiten, Drucken (PDF)** wird das Dialogfenster **Lösungsliste drucken (PDF)...** geöffnet.

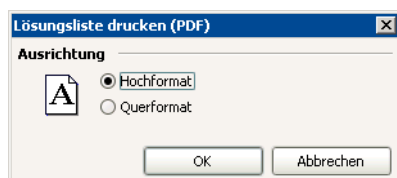

Ausrichtung

Hochformat

[ein], aus

Ausgabe der Lösungstabelle im Hochformat.

Querformat

ein, [aus]

Ausgabe der Lösungstabelle im Querformat.



Die Lösungstabelle wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, von wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

6.6.3 Lösungseigenschaften

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Eigenschaften...** im Unterfenster **Titriermittel/Lösungen** wird das Eigenschaftsfenster für die in der Lösungstabelle ausgewählte Lösung geöffnet, in dem die Parameter der Lösung bearbeitet werden können. Es besteht aus den folgenden Registerkarten:

- **Lösung**
Allgemeine Informationen zur Lösung wie Lösungsname, Konzentration, Herstellungsdatum, etc.
- **Titer**
Informationen zu Titerwert und Titerbestimmung.
- **Titer-History**
Anzeige der letzten 10 Titerwerte.
- **Wechseleinheit**
Eigenschaften der Wechseleinheit, in der sich die Lösung befindet.

- **Dosiereinheit**
Eigenschaften der Dosiereinheit, in der sich die Lösung befindet.
- **GLP**
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

Lösung

Lösungsname

24 Zeichen, Auswahl aus vordefinierten Namen

Name der Lösung, der eingegeben oder ausgewählt werden kann.

Konzentration

Wert: **1E-12 ... [1.000] ... 1E+12, max. 10 Zeichen**

Einheit: **20 Zeichen, [mol/L], mmol/L, µmol/mL, g/L, mg/L, µg/mL, mg/mL, ppm, %, mEq/L**

Konzentration der Lösung. Der Konzentrationswert einer Lösung, die von den Titrierbefehlen **DET**, **MET**, **SET** und **KFT** verwendet wird, steht als Variable '**Befehlsname.CONC**' für Berechnungen zur Verfügung.

Kommentar

24 Zeichen

Bemerkungen zur Lösung (z.B. Batchnummer.)

Herstellungsdatum

Datumsauswahl

Bei einer manuell neu hinzugefügten Lösung wird hier automatisch das aktuelle Datum eingetragen. Beim Editieren einer bestehenden Lösung kann das Datum nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden.

Lösung überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird die Nutzungsdauer der Lösung überwacht.

Nutzungsdauer

0 ... [999] Tage

Nutzungsdauer der Lösung in Tagen. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das **Verfallsdatum** automatisch angepasst.

Verfallsdatum

Datumsauswahl, [Herstellungsdatum + 999 Tage]

Verfallsdatum der Lösung. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für die **Nutzungsdauer** automatisch angepasst.

Aktion

Wird bei der Lösungsüberwachung festgestellt, dass die Nutzungsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren

Die Meldung, dass die Nutzungsdauer der Lösung abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.


Meldung anzeigen

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Nutzungsdauer der Lösung abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen

Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

Titer

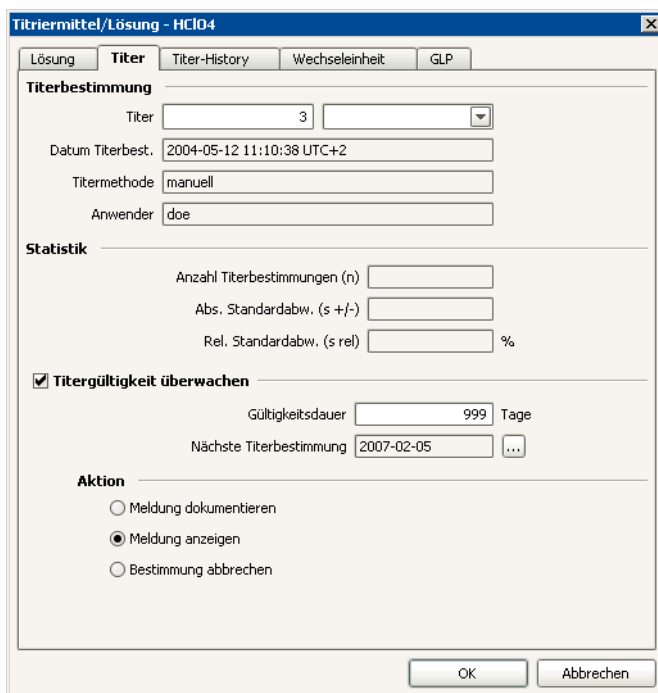

Titerbestimmung

Titer

Wert: **1E-12 ... [1.000] ... 1E+12, max. 10 Zeichen**

Einheit: **20 Zeichen, ['leer'], mol/L, mmol/L, µmol/mL, g/L, mg/L, µg/mL, mg/mL, ppm, %, mEq/L**

Titer der Lösung. Der Titerwert einer Lösung, die von den Titrierbefehlen **DET**, **MET**, **SET** und **KFT** verwendet wird, steht als Variable '**Befehlsname.TITER**' für Berechnungen zur Verfügung.

Datum Titerbestimmung

Datum und Zeit der letzten Titerbestimmung, das bei jeder automatischen Titerbestimmung oder manuellen Eingabe automatisch eingetragen wird.

Titermethode

Name der Methode, mit der die letzte Titerbestimmung durchgeführt wurde. Wenn der Titer manuell eingegeben wurde, wird hier **manuell** angezeigt.

Anwender

Kurzname des Anwenders, der während der Titerbestimmung angemeldet war bzw. den Titer von Hand eingetragen hat. Wenn nicht mit Anmeldung gearbeitet wird, wird automatisch der unter Windows angemeldete Anwender eingetragen.

Statistik

Die Statistikdaten werden nur angezeigt, falls der Titer als Mittelwert aus einer Mehrfachbestimmung durch die Titermethode zugewiesen wurde. Wird der Titer mit einer Einfachbestimmung ermittelt oder manuell eingetragen, so sind die Statistikwerte leer.

Anzahl Titerbestimmungen (n)

Anzahl Bestimmungen, die zur Titerbestimmung durchgeführt wurden.

Absolute Standardabweichung (s +/-)

Absolute Standardabweichung bei der Titerbestimmung in der Einheit des Titers.

Relative Standardabweichung (s rel)

Relative Standardabweichung bei der Titerbestimmung in %.

Titergültigkeit überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird die Gültigkeit des Titers überwacht.

Gültigkeitsdauer

0 ... [999] Tage

Gültigkeit des Titers in Tagen. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Datum für **Nächste Titerbestimmung** automatisch angepasst.

Nächste Titerbestimmung

Datumsauswahl, [Datum Titerbest. + 999 Tage]

Datum, an dem die nächste Titerbestimmung durchgeführt werden soll.

Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für die **Gültigkeitsdauer** automatisch angepasst.

Aktion

Wird bei der Titerüberwachung festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren

Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer des Titers abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.


Meldung anzeigen

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer des Titers abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen

Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

Titer-History

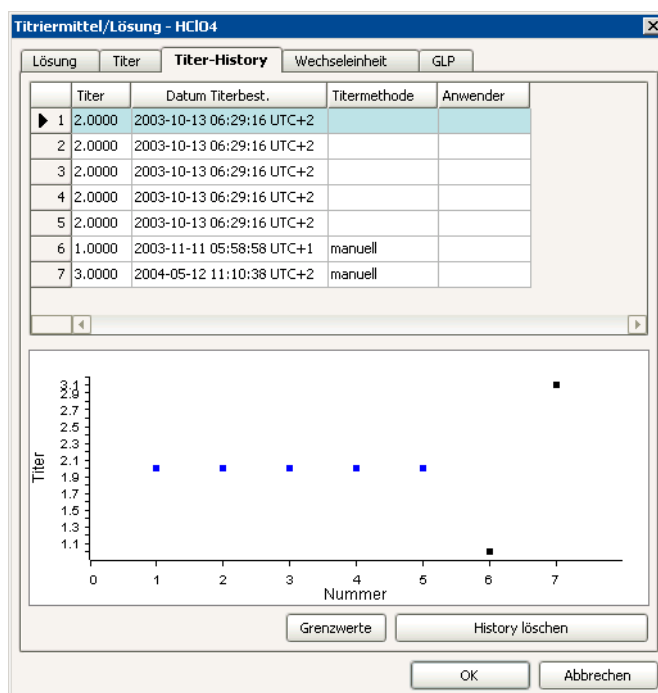

History-Tabelle

Die Tabelle enthält die 10 letzten Titerbestimmungen für die ausgewählte Lösung und ist nicht editier- und sortierbar. Die Titerbestimmungen werden nach Datum sortiert und zwar so, dass die aktuellste Bestimmung zuletzt aufgeführt wird.

Titer

Die Titerwerte werden in folgenden Farben eingetragen:

- **Blau**, wenn der Titer automatisch durch eine Methode bestimmt wurde.
- **Schwarz**, wenn der Titer manuell eingetragen wurde.
- **Orange**, wenn der Titer ausserhalb der Warngrenzen liegt.
- **Rot**, wenn der Titer ausserhalb der Eingreifgrenzen liegt.

Bei Verletzung der Warn- oder Eingreifgrenzen wird zusätzlich die Zeilennummer orange bzw. rot hinterlegt.

Datum Titerbes.

Datum und Zeit der Titerbestimmung.

Titermethode

Name der Methode, mit der die Titerbestimmung durchgeführt wurde. Wenn der Titer manuell eingegeben wurde, wird hier **manuell** angezeigt.

Anwender

Kurzname des Anwenders, der während der Titerbestimmung angemeldet war bzw. den Titer von Hand eingetragen hat. Wenn nicht mit Anmeldung gearbeitet wurde, wird automatisch der unter Windows angemeldete Anwender eingetragen.

History-Grafik

In der Grafik werden die 10 letzten Titerwerte für die ausgewählte Lösung dargestellt. Die Titerwerte werden wie in der History-Tabelle in unterschiedlichen Farben dargestellt:

- **Blau**, wenn der Titer automatisch durch eine Methode bestimmt wurde.
- **Schwarz**, wenn der Titer manuell eingetragen wurde.

Wenn Grenzen definiert sind, so werden die Warngrenzen **orange** und die Eingreifgrenzen **rot** eingezeichnet.

Hinweis

Die History-Grafik kann mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Kopieren** in die Zwischenablage kopiert werden.

Grenzwerte

Öffnen des Dialogfensters **Grenzwerte Titer**, in dem die Warn- und Eingreifgrenzen für den Titer definiert werden können. Diese Grenzen gelten nur für die Grafik, es findet keine Überwachung während der Titerbestimmung statt.

History löschen

Löschen der Titer-History.

Titer-History - Grenzwerte

Im Dialogfenster **Grenzwerte Titer** können Warn- und Eingreifgrenzen für den Titer definiert werden. Wenn Sie Grenzen festgelegt haben, werden diese in der Grafik für Warngrenzen **orange** und für Eingreifgrenzen **rot** eingezeichnet. Es wird aber nicht überwacht, ob die Grenzen eingehalten werden, d.h. mit dem Unter- oder Überschreiten der Grenzwerte sind keinerlei Aktionen verbunden.

Warngrenzen für Titer

ein, [aus]

Ist diese Option **eingeschaltet**, werden die Titerwerte beim Überschreiten dieser Grenzen **orange** dargestellt.

Untere Grenze

10 Ziffern, [0.9750]

Untere Warngrenze.

Obere Grenze

10 Ziffern, [1.0250]

Obere Warngrenze.

Eingreifgrenzen für Titer

ein, [aus]

Ist diese Option **eingeschaltet**, werden die Titerwerte beim Überschreiten dieser Grenzen **rot** dargestellt.

Untere Grenze

10 Ziffern, [0.9500]

Untere Eingreifgrenze.

Obere Grenze

10 Ziffern, [1.0500]

Obere Eingreifgrenze.

Wechseleinheit

Hardware

Name

24 Zeichen, ['leer']

Frei definierbare Bezeichnung für die Wechseleinheit.

Typ

Anzeige des Typs der Wechseleinheit:

WE

Nicht-intelligente Wechseleinheit ohne Datenchip.

IWE

Intelligente Wechseleinheit 806 mit Datenchip.

Bestellnummer

24 Zeichen, ['leer']

Bestellnummer für die Wechseleinheit. Bei intelligenten Wechseleinheiten wird die Bestellnummer automatisch ausgelesen und kann nicht editiert werden.

Seriennummer

24 Zeichen, ['leer']

Seriennummer für die Wechseleinheit. Bei intelligenten Wechseleinheiten wird die Seriennummer automatisch ausgelesen und kann nicht editiert werden.

Zylindervolumen

1, 5, 10, [20], 50 mL

Zylindervolumen für die Wechseleinheit. Bei intelligenten Wechseleinheiten wird das Zylindervolumen automatisch ausgelesen und kann nicht editiert werden. Wenn Sie in der Methode in einem Titrations- oder Dosierbefehl eine Lösung ausgewählt haben, wird das Zylindervolumen im Ablauf überprüft.

Zylinder-Seriennummer

24 Zeichen, ['leer']

Seriennummer des Zylinders. Sie ist bei neuen Zylindern aufgedruckt. Bei intelligenten Wechseleinheiten wird sie automatisch ausgelesen. Sie kann aber jederzeit geändert werden, falls z.B. der Zylinder ersetzt wurde.

Parameter für Vorbereiten

Konfiguration der Parameter, die beim den Befehl **PREP** verwendet werden sollen.

Volumen

0.00000 ... 99999.99999 mL, [Zylindervolumen]

Volumen, das beim Vorbereiten dosiert werden soll. Mit **Zylindervolumen** wird der gesamte Inhalt des Zylinders dosiert.

Wiederholungen

1 ... [2] ... 9

Anzahl Wiederholungen für die Spülzyklen des Vorbereitens.

Dosiergeschwindigkeit

0.01 ... 150.00 mL/min, [maximal]

Geschwindigkeit, mit der die Lösung dosiert werden soll. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit ab (siehe unten). Beim Ausführen der Funktion wird die Geschwindigkeit automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

Füllgeschwindigkeit

0.01 ... 150.00 mL/min, [maximal]

Geschwindigkeit, mit welcher der Zylinder gefüllt werden soll. Die maximale Füllgeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Wechseleinheit ab (siehe unten). Beim Ausführen der Funktion wird die Geschwindigkeit automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

Maximale Dosier-/Füllgeschwindigkeit für die Wechseleinheit in Abhängigkeit des Zylindervolumens:

Zylindervolumen	maximale Geschwindigkeit
1 mL	3.0 mL/min
5 mL	15.0 mL/min
10 mL	30.0 mL/min
20 mL	60.0 mL/min
50 mL	150.0 mL/min

Hinweis

Geben Sie kleinere Geschwindigkeiten an, wenn die Lösung eine höhere Viskosität besitzt.

Schlauchparameter

Definition von Länge und Durchmesser der an der Wechseleinheit angeschlossenen Schläuche. Diese Parameter sind für die korrekte Ausführung des Befehls **PREP** mit der Wechseleinheit wichtig, da die Volumen der Schlauchverbindungen berücksichtigt werden.

Hinweis

Für die Schlauchparameter sind bereits Standardwerte eingetragen, die den Abmessungen der mitgelieferten Standardschläuche entsprechen. So lange Sie an den Schlauchverbindungen nichts ändern, müssen Sie die Schlauchparameter nicht ändern.

Dosierspitze

Länge

0.0 ... [40.0] ... 999.9 cm

Länge des Schlauches, der den Hahn mit der Dosierspitze verbindet.

Durchmesser

0.0 ... [2.0] ... 9.9 mm

Durchmesser des Schlauches, der den Hahn mit der Dosierspitze verbindet.

Zylinder

Länge

0.0 ... [13.0] ... 999.9 cm

Länge des Schlauches, der den Hahn mit dem Zylinder verbindet.

Durchmesser

0.0 ... [2.0] ... 9.9 mm

Durchmesser des Schlauches, der den Hahn mit dem Zylinder verbindet.

Reagenzflasche

Länge

0.0 ... [25.0] ... 999.9 cm


Länge des Schlauches, der den Hahn mit der Reagenzflasche verbindet.

Durchmesser

0.0 ... [2.0] ... 9.9 mm

Durchmesser des Schlauches, der den Hahn mit der Reagenzflasche verbindet.

Schlauchverbindungen der Wechseleinheit

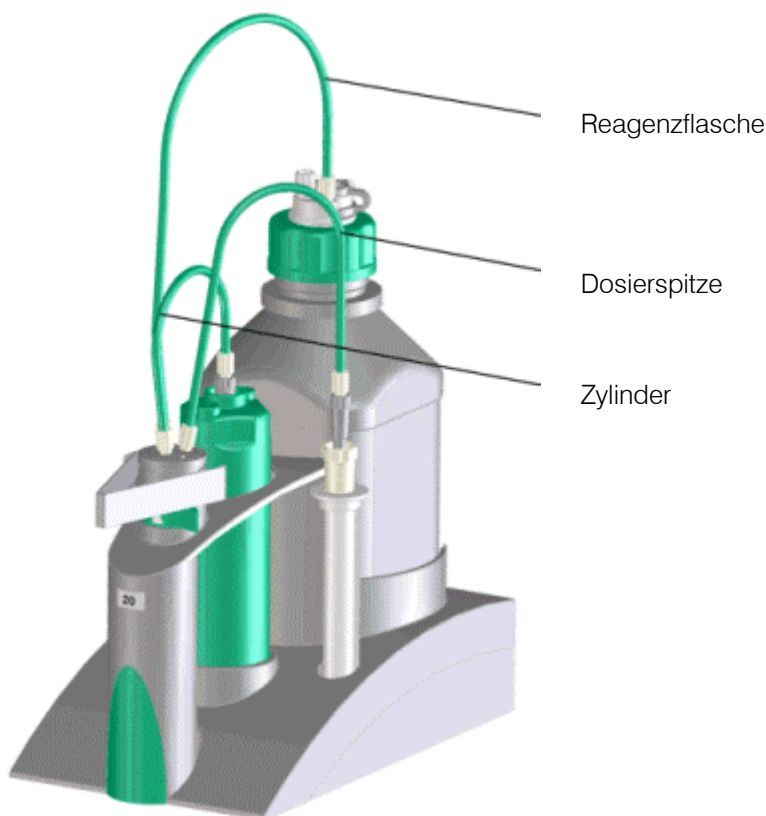

Dosiereinheit

Port	Länge	Durchmesser
Dosierport 1	40.0 cm	2.0 mm
Dosierport 2	5.0 cm	2.0 mm
Füllport	25.0 cm	2.0 mm
Spezialport	0.0 cm	2.0 mm

Hardware

Name

24 Zeichen, ['leer']

Frei definierbare Bezeichnung für die Dosiereinheit.

Typ

Anzeige des Typs der Dosiereinheit:

DE

Nicht-intelligente Dosiereinheit ohne Datenchip.

IDE

Intelligente Dosiereinheit 807 mit Datenchip.

Bestellnummer

24 Zeichen, ['leer']

Bestellnummer für die Dosiereinheit. Bei intelligenten Dosiereinheiten wird die Bestellnummer automatisch ausgelesen und kann nicht editiert werden.

Seriennummer

24 Zeichen, ['leer']

Seriennummer für die Dosiereinheit. Bei intelligenten Dosiereinheiten wird die Seriennummer automatisch ausgelesen und kann nicht editiert werden.

Zylindervolumen

2, 5, 10, [20], 50 mL

Zylindervolumen für die Dosiereinheit. Bei intelligenter Dosiereinheit wird das Zylindervolumen automatisch ausgelesen und kann nicht editiert werden. Wenn Sie in der Methode in einem Titrations- oder Dosierbefehl eine Lösung ausgewählt haben, wird das Zylindervolumen im Ablauf überprüft.

Zylinder-Seriennummer

24 Zeichen, ['leer']

Seriennummer des Zylinders. Sie ist bei neuen Zylindern aufgedruckt. Bei intelligenten Dosiereinheiten wird sie automatisch ausgelesen. Sie kann aber jederzeit geändert werden, falls z.B. der Zylinder ersetzt wurde.

Parameter für Vorbereiten

Konfiguration der Parameter, die bei den Befehlen **PREP** und **EMPTY** verwendet werden sollen.

Dosierport Vorbereiten/Leeren

[Dosierport 1], Dosierport 2, Füllport, Spezialport

Dosierport, über den der Zylinderinhalt beim Vorbereiten und Leeren ausgestossen werden soll.

Dosiergeschw. Dosierport 1

0.01...166.00 mL/min, [maximal]

Geschwindigkeit, mit der über **Dosierport 1** dosiert werden soll. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit ab (siehe unten). Beim Ausführen der Funktion wird die Geschwindigkeit automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

Dosiergeschw. Dosierport 2

0.01...166.00 mL/min, [maximal]

Geschwindigkeit, mit der über **Dosierport 2** dosiert werden soll. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit ab (siehe unten). Beim Ausführen der Funktion wird die Geschwindigkeit automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

Dosiergeschw. Füllport

0.01...166.00 mL/min, [maximal]

Geschwindigkeit, mit der über den **Füllport** dosiert werden soll. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit ab (siehe unten). Beim Ausführen der Funktion wird die Geschwindigkeit automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

Dosiergeschw. Spezialport

0.01...166.00 mL/min, [maximal]

Geschwindigkeit, mit der über den **Spezialport** dosiert werden soll. Die maximale Dosiergeschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit ab (siehe unten). Beim Ausführen der Funktion wird die Geschwindigkeit automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

Maximale Dosier-/Füllgeschwindigkeit für die Dosiereinheit in Abhängigkeit des Zylindervolumens:

Zylindervolumen	maximale Geschwindigkeit
2 mL	6.6 mL/min
5 mL	16.6 mL/min
10 mL	33.3 mL/min
20 mL	66.6 mL/min
50 mL	166.0 mL/min

Hinweis

Geben Sie kleinere Geschwindigkeiten an, wenn die Lösung eine höhere Viskosität besitzt.

Schlauchparameter

Definition von Länge und Durchmesser der an der Dosiereinheit angeschlossenen Schläuche. Zusätzlich kann die Portbelegung geändert werden. Diese Parameter sind für die korrekte Ausführung der Befehle **PREP** und **EMPTY** mit der Dosiereinheit wichtig, da die Volumen der Schlauchverbindungen berücksichtigt werden.

Hinweis

Für die Schlauchparameter sind bereits Standardwerte eingetragen, die den Abmessungen der mitgelieferten Standardschläuche entsprechen. So lange Sie an den Schlauchverbindungen nichts ändern, müssen Sie die Schlauchparameter nicht ändern.

Dosierport 1

Port

[Port 1], Port 2, Port 3, Port 4

Port, der als Dosierport 1 verwendet wird.

Länge

0.0 ... [40.0] ... 999.9 cm

Länge des Schlauches an Dosierport 1.

Durchmesser

0.0 ... [2.0] ... 9.9 mm

Durchmesser des Schlauches an Dosierport 1.

Dosierport 2

Port

Port 1, Port 2, [Port 3], Port 4

Port, der als Dosierport 2 verwendet wird.

Länge

[0.0] ... 999.9 cm

Länge des Schlauches an Dosierport 2.

Durchmesser

0.0...[2.0]...9.9 mm

Durchmesser des Schlauches an Dosierport 2.

Füllport

Port

Port 1, [Port 2], Port 3, Port 4

Port, der als Füllport zum Ansaugen von Lösung verwendet wird.

Länge

0.0...[25.0]...999.9

Länge des Schlauches am Füllport.

Durchmesser

0.0...[2.0]...9.9 mm

Durchmesser des Schlauches am Füllport.

Spezialport

Port

Port 1, Port 2, Port 3, [Port 4]

Port, der als Spezialport verwendet wird.

Länge

[0.0] ... 999.9 cm


Länge des Schlauches am Spezialport.

Durchmesser

0.0...[2.0]...9.9 mm

Durchmesser des Schlauches am Spezialport.

Port-Belegung der Dosiereinheit:

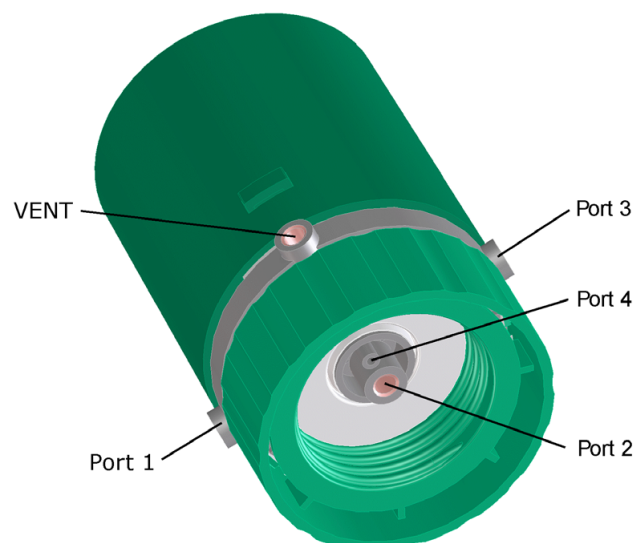

Hahnscheibe

Drehrichtung

absteigend, aufsteigend, [automatisch], nicht über

Angabe der Drehrichtung der Hahnscheibe. **automatisch** ist diejenige Drehrichtung mit dem kleinsten Weg.

Nicht über

Port 1, Port 2, Port 3, [Port 4]

Auswahl eines geschützten Ports, der bei der Rotation nicht angefahren wird.

GLP

Titriermittel/Lösung - CuSO4

Lösung Titer Titer-History Dosiereinheit **GLP**

Datum GLP-Test: 2004-11-01 ...

☒ **GLP-Gültigkeit überwachen**

Intervall GLP-Test: 999 Tage

Nächster GLP-Test: 2007-07-28 ...

Aktion

☐ Meldung dokumentieren

☒ Meldung anzeigen

☐ Bestimmung abbrechen

OK Abbrechen

Datum GLP-Test

Datumsauswahl

Datum des letzten GLP-Tests für die Wechsel- oder Dosiereinheit. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden.

GLP-Gültigkeit überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Hinweis

Diese Option kann erst eingeschaltet werden, wenn unter **Datum GLP-Test** ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

0 ... [999] Tage

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Intervall eingegeben, wird das Datum für **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nächster GLP-Test

Datumsauswahl, [Datum GLP-Test + 999 Tage]

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Dieses

Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Aktion

Ist das Zeitintervall für den GLP-Test abgelaufen, wird sowohl beim Starttest (Einzelbestimmung oder Bestimmungsserie) wie auch beim Befehlsablauf eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren

Die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass das GLP-Testintervall abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen

Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

6.7 Unterfenster Sensoren

6.7.1 Allgemeines

Unterfenster Sensoren

Das Unterfenster **Sensoren** enthält die Sensortabelle mit allen konfigurierten Sensoren. Es kann im Programmteil **Konfiguration** als Bestandteil der Konfigurationsansicht oder (falls nicht auf der Oberfläche vorhanden) mit **Ansicht, Schnellzugriff** in einem separaten Fenster angezeigt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrößert und verkleinert und auch maximiert werden.

Standard-Sensoren

Die Sensortabelle enthält standardmässig folgende Sensoren, welche nicht gelöscht werden können:

- **Conductivity sensor** (Leitfähigkeitssensor)
- **ISE electrode** (Ionenselektive Elektrode)
- **Metal electrode** (Metallelektrode)
- **pH electrode** (pH-Elektrode)
- **Temperature sensor** (Temperatursensor)

6.7.2 Sensortabelle

Sensoren							
	Sensorname ▲	Sensortyp	Inbetriebnahme	Verfallsdatum	Steilheit	pH(0)/E(0)	Nächste Kalibrierung
▶ 1	Conductivity sensor	Anderer Sensor	2004-08-12				
2	ISE electrode	ISE-Elektrode	2004-08-12		-59.2	0.0	
3	Metal electrode	Metallelektrode	2004-08-12				
4	pH electrode	pH-Elektrode	2004-08-12		100.0	7.0	
5	Temperature sensor	Temperatursensor	2004-08-12				

Inhalt

In der Sensortabelle werden standardmässig die folgenden Informationen zu den konfigurierten Sensoren angezeigt:

Sensorname

Name des Sensors.

Sensortyp

Typ des Sensors.

Inbetriebnahme

Datum der Inbetriebnahme des Sensors.

Verfallsdatum

Verfallsdatum des Sensors. Ist die Sensor-Überwachung eingeschaltet und das eingestellte Datum kleiner als das aktuelle Datum (d.h. die Nutzungsdauer ist abgelaufen), wird das Datum mit roter Schrift dargestellt.

Steilheit

Steilheit des Sensors in % oder mV.

pH(0)/E(0)

Elektrodennullpunkt des Sensors.

Nächste Kalibrierung

Datum, an dem die nächste Kalibrierung durchgeführt werden soll. Ist die Kalibrier-Überwachung eingeschaltet und das eingestellte Datum kleiner als das aktuelle Datum (d.h. die Kalibrierung wurde noch nicht durchgeführt), wird das Datum mit roter Schrift dargestellt.

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Spaltenanzeige...** können weiteren Spalten aus den Sensoreigenschaften angezeigt werden.

Hinweise

Bei Zeilen mit roten Einträgen wird zusätzlich der Hintergrund der Zeilennummer rot markiert.

Tabellenansicht

Die Sensortabelle ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:**
Einstellen der Spaltenbreite
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:**
Einstellen der optimalen Spaltenbreite
- **Ziehen des Spaltentitels:**
Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mauscursors auf dem Feld als Tooltip angezeigt.

Funktionen



Das Menü **Bearbeiten** unterhalb der Sensortabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu...

Manuelles Hinzufügen eines neuen Sensors.

Löschen

Löschen des ausgewählten Sensors.

Eigenschaften...

Bearbeiten des ausgewählten Sensors.

Spaltenanzeige...


Spalten für Sensortabelle definieren.

Drucken (PDF)...

Ausgabe der Sensortabelle als PDF-Datei.

Spaltenanzeige

Mit **Bearbeiten, Spaltenanzeige...** wird das Dialogfenster **Spaltenanzeige** geöffnet. Hier können die Spalten definiert werden, welche in der Sensortabelle angezeigt werden sollen.

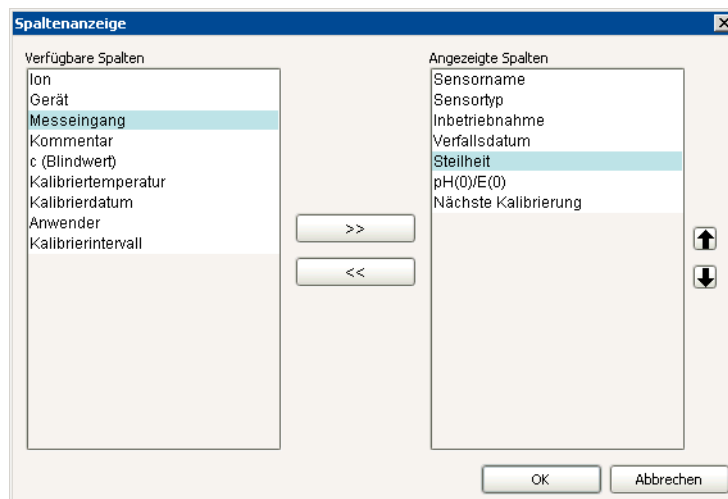

Verfügbare Spalten


Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Sensortabelle angezeigt werden können.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Sensortabelle angezeigt werden. Defaultmässig werden die Spalten **Sensorname**, **Sensortyp**, **Inbetriebnahme**, **Verfallsdatum**, **Steilheit**, **pH(0)/E(0)** und **Nächste Kalibrierung** angezeigt. Die beiden Spalten **Sensorname** und **Sensortyp** sind immer vorhanden und können nicht entfernt werden.



Hinzufügen der ausgewählten Spalte in die Tabelle.

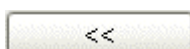

Entfernen der ausgewählten Spalte aus der Tabelle.




Ändern der Reihenfolge der angezeigten Spalten durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach oben bzw. nach unten.

Neuen Sensor hinzufügen

Um einen neuen Sensor in die Sensortabelle hinzuzufügen, muss der Menüpunkt **Bearbeiten, Neu** gedrückt und anschliessend einer der folgenden möglichen Sensortypen ausgewählt werden:

- **pH-Elektrode**
- **Metallelektrode**
- **ISE-Elektrode**
- **Temperatursensor**
- **Anderer Sensor**

Danach öffnet sich automatisch das Eigenschaftensfenster für die Konfiguration des Sensors. Wird der Sensortyp **ISE-Elektrode** ausgewählt, öffnet sich zuvor noch das Dialogfenster **Neue ISE-Elektrode** für die Definition des Messions.

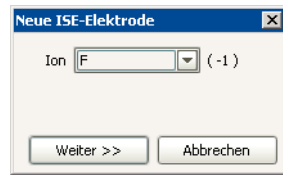

Ion

Ag, BF₄, Br, Ca, Cd, Cl, CN, Cu, [F], I, K, Na, NH₄, NO₂, NO₃, Pb, S, SCN, SO₄, Tensid, Eigenes

Auswahl des Messions aus der Liste oder Definition eines anderen Ions mit **Eigenes**. Neben dem gewählten Mession wird automatisch die entsprechende Wertigkeit angezeigt.

Name

Name: [leer], max. 6 Zeichen

Wertigkeit: -4, -3, -2, -1, +1, [+2], +3, +4


Eingabe eines Namens für das selbstgewählte Ion ein und Auswahl der Wertigkeit. Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn im Feld **Ion Eigenes** gewählt ist.

Sensor löschen

Mit **Bearbeiten, Löschen** wird der in der Sensortabelle ausgewählte Sensor gelöscht.

Sensorliste drucken

Mit **Bearbeiten, Drucken (PDF)...** wird das Dialogfenster **Sensorliste drucken (PDF)** geöffnet.

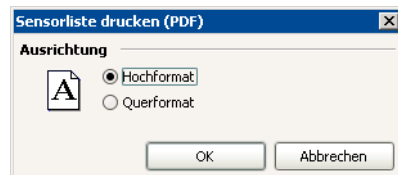

Ausrichtung

Hochformat

[ein], aus

Ausgabe der Sensortabelle im Hochformat.

Querformat

ein, [aus]

Ausgabe der Sensortabelle im Querformat.



Die Sensortabelle wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, von wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

6.7.3 Sensoreigenschaften

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Eigenschaften...** im Unterfenster **Sensoren** wird das Eigenschaftsfenster für den in der Sensortabelle ausgewählte Sensor geöffnet, in dem die Parameter des Sensors bearbeitet werden können. Es besteht aus den folgenden Registerkarten:

- **Sensor**
Allgemeine Informationen zum Sensor wie Sensordname, Sensortyp, Inbetriebnahme, etc.
- **Kalibrierdaten**
Informationen zur Kalibrierung des Sensors.
- **Grenzwerte**
Definition der Grenzwertüberwachung für Steilheit und Elektrodennullpunkt.
- **History**
Anzeige der letzten 10 Kalibrierwerte.

Sensor

Sensorname

24 Zeichen

Name des Sensors.

Sensortyp

Anzeige des Sensortyps.

Ion

Anzeige des Messions und seiner Wertigkeit. Dieser Parameter erscheint nur bei **ISE-Elektroden**.

Bestellnummer

24 Zeichen, ['leer']

Möglichkeit zur Eingabe der Bestellnummer des Sensors.

Sensor-Serienummer

10 Zeichen, ['leer']

Möglichkeit zur Eingabe der Seriennummer des Sensors.

Gerät

Geräteauswahl, ['leer']

Möglichkeit zur Auswahl des Gerätes, an dem der Sensor angeschlossen ist. Es werden alle Geräte aus der Gerätetabelle in der Auswahlliste angezeigt, welche über einen Messeingang verfügen. Der Anschluss eines Sensors an ein bestimmtes Gerät wird im Ablauf nicht überprüft.

Messeingang

[1], 2

Möglichkeit zur Auswahl des Messeinganges, an dem der Sensor angeschlossen ist. Der Anschluss eines Sensors an einen bestimmten Messeingang wird im Ablauf nicht überprüft. Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn ein **Gerät** ausgewählt wurde.

Kommentar

24 Zeichen

Möglichkeit zur Eingabe von Bemerkungen zum Sensor.

Inbetriebnahme

Datumsauswahl

Bei einem neu hinzugefügten Sensor wird hier automatisch das aktuelle Datum eingetragen. Beim Editieren eines bestehenden Sensors kann das Datum nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden.

Sensor überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird die Nutzungsdauer des Sensors überwacht.

Nutzungsdauer

0 ... [999] Tage

Nutzungsdauer des Sensors in Tagen. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das **Verfallsdatum** automatisch angepasst.

Verfallsdatum

Datumsauswahl, [Inbetriebnahme + 999 Tage]

Verfallsdatum des Sensors. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für die **Nutzungsdauer** automatisch angepasst.

Aktion

Wird bei der Sensorüberwachung festgestellt, dass die Nutzungsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren

Die Meldung, dass die Nutzungsdauer des Sensors abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Nutzungsdauer des Sensors abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen

Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

Kalibrierdaten

Hinweis

Diese Registerkarte wird nur für pH- und ISE-Elektroden angezeigt.

Steilheit

pH-Elektrode: **-999.9 ... 999.9 %**, [100.0]

ISE-Elektrode: **-999.9 ... 999.9 mV**, [59.2/Wertigkeit]

Steilheit der pH- bzw. ISE-Elektrode. Dieser Wert kann mit einer Kalibrierung aus der linearisierten Kalibriergeraden automatisch bestimmt oder manuell eingetragen werden. Die Steilheit eines Sensors, der von den Befehlen **DET**, **MET**, **SET**, **KFT**, **MEAS** und **CAL LOOP** verwendet wird, steht als Variable '**Befehlsname.SLO**' für Berechnungen zur Verfügung.

pH(0)

-20.000 ... [7.000] ... 20.000

Der Elektrodennullpunkt **pH(0)** wird nur bei pH-Elektroden angezeigt. **pH(0)** ist nach der Steilheit die zweite charakteristische Kenngrösse der Kalibrierfunktion $U = f(pH)$. **pH(0)** ist der x-Achsenabschnitt der Kalibrierkurve, entspricht also dem pH-Wert bei 0 mV. Der Elektrodennullpunkt **pH(0)** einer pH-Elektrode, die von den Befehlen **DET**, **MET**, **SET**, **KFT**, **MEAS** und **CAL LOOP** verwendet wird, steht als Variable '**Befehlsname.ENP**' für Berechnungen zur Verfügung.

E(0)

-2000.0 ... [0.0] ... 2000.0 mV

Der Elektrodennullpunkt **E(0)** wird nur bei ISE-Elektroden angezeigt. **E(0)** ist die zweite charakteristische Kenngrösse der Kalibrierfunktion $U = f(\log c)$. **E(0)** ist der y-Achsenabschnitt der Kalibrierkurve, entspricht also der Spannung bei $\log c = 0$. Der Elektrodennullpunkt **E(0)** einer ISE-Elektrode, die von den Befehlen **DET**, **MET**, **SET**, **KFT**, **MEAS** und **CAL LOOP** verwendet wird, steht als Variable '**Befehlsname.ENP**' für Berechnungen zur Verfügung.

c (Blindwert)

[0.00] ... 999999999

Dieser Parameter wird nur bei ISE-Elektroden angezeigt. **c (Blindwert)** ist die dritte charakteristische Kenngrösse der Kalibrierfunktion $U = f(\log c)$. Sie spiegelt gewissermassen die Krümmung der Kalibrierfunktion bei niedrigen

ten Konzentrationen wider. Die Krümmung wird durch den Einfluss von sogenannten Störionen verursacht. Wenn die Konzentrations-Kalibrierung mit weniger als 3 Standards durchgeführt wird, wird **c (Blindwert)** gleich Null gesetzt. Der Parameter **c (Blindwert)** ist einer ISE-Elektrode, die von den Befehlen **MEAS Conc** und **CAL MEAS Conc** verwendet wird, steht als Variable '**Befehlsname.BLV**' für Berechnungen zur Verfügung

Kalibriertemperatur

-20.0 ... [25.0] ... 150.0 °C

Temperatur bei der Kalibrierung. Zusätzlich wird angezeigt, ob die Temperatur mit einem Pt1000 oder einem NTC-Temperaturfühler gemessen oder manuell eingetragen wurde.

Kalibrierdatum

Datum und Zeit der letzten Kalibrierung, das bei jeder automatischen Kalibrierung oder manuellen Eingabe automatisch eingetragen wird.

Kalibriermethode

Name der Methode, mit der die letzte Kalibrierung durchgeführt wurde. Wenn die Kalibrierdaten manuell eingegeben wurden, wird hier **manuell** angezeigt.

Anwender

Kurzname des Anwenders, der während der Kalibrierung angemeldet war bzw. die Kalibrierdaten von Hand eingetragen hat. Wenn nicht mit Anmeldung gearbeitet wird, wird automatisch der unter Windows angemeldete Anwender eingetragen.

Kalibrierüberwachung

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird die Gültigkeit der Kalibrierung überwacht.

Kalibrierintervall

0 ... [999] Tage

Gültigkeit der Kalibrierung in Tagen. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Datum für **Nächste Kalibrierung** automatisch angepasst.

Nächste Kalibrierung

Datumsauswahl, [Kalibrierdatum + 999 Tage]

Datum, an dem die nächste Kalibrierung durchgeführt werden soll. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für die **Kalibrierintervall** automatisch angepasst.

Aktion

Wird bei der Kalibrierüberwachung festgestellt, dass deren Gültigkeit abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren

Die Meldung, dass die Gültigkeit der Kalibrierung abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeit der Kalibrierung abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen

Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

Grenzwerte

Hinweis

Diese Registerkarte wird nur für pH- und ISE-Elektroden angezeigt.

Steilheit überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird überwacht, ob die bei der Kalibrierung ermittelte **Steilheit** innerhalb der definierten Grenzwerte liegt. Liegt sie ausserhalb, erscheint eine entsprechende Meldung und Sie können entscheiden, ob Sie den Wert trotzdem übernehmen wollen oder ob der bisherige Wert beibehalten werden soll.

Untere Grenze

-2.147E+9 ... 2.147E+9

pH: **96.0 %**

ISE (+1): **55.0 mV** ISE (-1): **-61.0 mV**

ISE (+2): **25.0 mV** ISE (-2): **-31.0 mV**

ISE (+3): **16.0 mV** ISE (-3): **-23.0 mV**

ISE (+4): **12.0 mV** ISE (-4): **-17.0 mV**

Unterer Grenzwert für die Steilheit.

Obere Grenze

-2.147E+9 ... 2.147E+9

pH: **101.0 %**

ISE (+1): **61.0 mV** ISE (-1): **-55.0 mV**

ISE (+2): **31.0 mV** ISE (-2): **-25.0 mV**

ISE (+3): **23.0 mV** ISE (-3): **-16.0 mV**

ISE (+4): **17.0 mV** ISE (-4): **-12.0 mV**

Oberer Grenzwert für die Steilheit.

pH(0) überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird überwacht, ob der bei der Kalibrierung einer pH-Elektrode ermittelte Elektrodennullpunkt **pH(0)** innerhalb der definierten Grenzwerte liegt. Liegt er ausserhalb, erscheint eine entsprechende

Meldung und Sie können entscheiden, ob Sie den Wert trotzdem übernehmen wollen oder ob der bisherige Wert beibehalten werden soll.

Untere Grenze

-2.147E+9 ... [6.750] ... 2.147E+9

Unterer Grenzwert für pH(0).

Obere Grenze

-2.147E+9 ... [7.250] ... 2.147E+9

Oberer Grenzwert für pH(0).

E(0) überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird überwacht, ob der bei der Kalibrierung einer ISE-Elektrode ermittelte Elektrodennullpunkt **E(0)** innerhalb der definierten Grenzwerte liegt. Liegt er ausserhalb, erscheint eine entsprechende Meldung und Sie können entscheiden, ob Sie den Wert trotzdem übernehmen wollen oder ob der bisherige Wert beibehalten werden soll.

Untere Grenze

-2.147E+9 ... [-2000.0] ... 2.147E+9 mV

Unterer Grenzwert für E(0).

Obere Grenze


-2.147E+9 ... [2000.0] ... 2.147E+9 mV

Oberer Grenzwert für E(0).

History

Hinweis

Diese Registerkarte wird nur für pH- und ISE-Elektroden angezeigt.

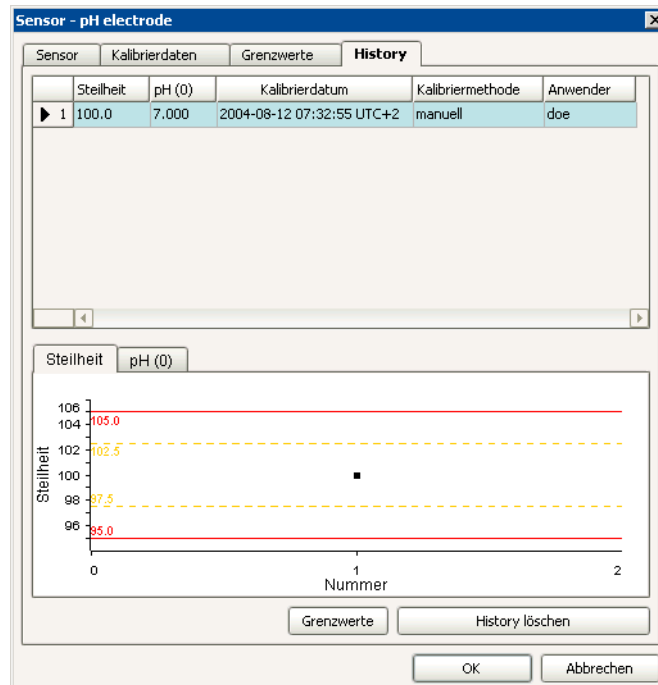

History-Tabelle

Die Tabelle enthält die 10 letzten Kalibrierungen für den ausgewählten Sensor und ist nicht editier- und sortierbar. Die einzelnen Kalibrierungen werden nach Datum sortiert und zwar so, dass die aktuellste Bestimmung zuletzt aufgeführt wird. Für

pH-Elektroden werden die **Steilheit** sowie **pH(0)** angezeigt, für ISE-Elektroden die **Steilheit**, **E(0)** und **c (Blindwert)**.

Steilheit, pH(0), E(0) und c (Blindwert)

Die Werte werden in folgenden Farben eingetragen:

- **Blau**, wenn die Werte automatisch durch eine Methode bestimmt wurden.
- **Schwarz**, wenn die Werte manuell eingetragen wurden.
- **Orange**, wenn die Werte ausserhalb der Warngrenzen liegen.
- **Rot**, wenn die Werte ausserhalb der Eingreifgrenzen liegen

Bei Verletzung der Warn- oder Eingreifgrenzen wird zusätzlich die Zeilennummer orange bzw. rot hinterlegt.

Kalibrierdatum

Datum und Zeit der Kalibrierung.

Kalibriermethode

Name der Methode, mit der die Kalibrierung durchgeführt wurde. Wenn die Kalibrierdaten manuell eingegeben wurden, wird hier **manuell** angezeigt.

Anwender

Kurzname des Anwenders, der während der Kalibrierung angemeldet war bzw. die Kalibrierdaten von Hand eingetragen hat. Wenn nicht mit Anmeldung gearbeitet wurde, wird automatisch der unter Windows angemeldete Anwender eingetragen.

History-Grafik

Auf den beiden Registerkarten **Steilheit** und **pH(0)** bzw. **E(0)** werden je die 10 letzten Werte für den ausgewählten Sensor dargestellt. Die Werte werden wie in der History-Tabelle in unterschiedlichen Farben dargestellt:

- **Blau**, wenn die Werte automatisch durch eine Methode bestimmt wurden.
- **Schwarz**, wenn die Werte manuell eingetragen wurden.

Wenn Grenzen definiert sind, so werden die Warngrenzen **orange** und die Eingreifgrenzen **rot** eingezeichnet.

Hinweis

Die History-Grafik kann mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Kopieren** in die Zwischenablage kopiert werden.

Grenzwerte

Öffnen des Dialogfensters **Grenzwerte Sensor**, in dem die Warn- und Eingreifgrenzen für die Kalibrierdaten definiert werden können. Diese Grenzen gelten nur für die Grafik, es findet keine Überwachung während der Kalibrierung statt. Für die Überwachung während der Kalibrierung gelten die unter Grenzwerte (siehe *Sensoreigenschaften - Grenzwerte*) gesetzten Grenzen.

History löschen

Löschen der Sensor-History.

Sensor-History - Grenzwerte

Im Dialogfenster **Grenzwerte Sensor** können Warn- und Eingreifgrenzen für die Steilheit und pH(0) bzw. E(0) definiert werden. Wenn Sie Grenzen festgelegt haben, werden diese in der Grafik für Warngrenzen **orange** und für Eingreifgrenzen **rot** eingezeichnet. Es wird aber nicht überwacht, ob die Grenzen eingehalten werden, d.h. mit dem Unter- oder Überschreiten der Grenzwerte sind keinerlei Aktio-

nen verbunden. Für die Überwachung während der Kalibrierung gelten die unter Grenzwerte (siehe Sensoren - Eigenschaften - Grenzwerte) gesetzten Grenzen.

Warngrenzen für Steilheit

ein, [aus]

Ist diese Option **eingeschaltet**, werden die Werte für die Steilheit beim Überschreiten dieser Grenzen **orange** dargestellt.

Untere Grenze

-2.147E+9 ... 2.147E+9

pH-Elektrode: **97.5 %**

ISE (+1): 57.2 mV	ISE (-1): -61.2 mV
ISE (+2): 27.7 mV	ISE (-2): -31.7 mV
ISE (+3): 17.7 mV	ISE (-3): -21.7 mV
ISE (+4): 12.8 mV	ISE (-4): -16.8 mV

Untere Warngrenze für die Steilheit.

Obere Grenze

-2.147E+9 ... 2.147E+9

pH-Elektrode: **102.5 %**

ISE (+1): 61.2 mV	ISE (-1): -57.2 mV
ISE (+2): 31.7 mV	ISE (-2): -27.7 mV
ISE (+3): 21.7 mV	ISE (-3): -17.7 mV
ISE (+4): 16.8 mV	ISE (-4): -12.8 mV

Obere Warngrenze für die Steilheit.

Eingreifgrenzen für Steilheit

ein, [aus]

Ist diese Option **eingeschaltet**, werden die Werte für die Steilheit beim Überschreiten dieser Grenzen **rot** dargestellt.

Untere Grenze

-2.147E+9 ... 2.147E+9

pH: **95.0 %**

ISE (+1): 55.0 mV	ISE (-1): -62.4 mV
ISE (+2): 26.7 mV	ISE (-2): -32.7 mV
ISE (+3): 16.7 mV	ISE (-3): -22.7 mV
ISE (+4): 11.8 mV	ISE (-4): -17.8 mV

Untere Eingreifgrenze für die Steilheit.

Obere Grenze

-2.147E+9 ... 2.147E+9

pH: **105.0 %**

ISE (+1): 62.4 mV	ISE (-1): -55.0 mV
ISE (+2): 32.7 mV	ISE (-2): -26.7 mV
ISE (+3): 22.7 mV	ISE (-3): -16.7 mV
ISE (+4): 17.8 mV	ISE (-4): -11.8 mV

Obere Eingreifgrenze für die Steilheit.

Warngrenzen für pH(0) bzw. E(0)

ein, [aus]

Ist diese Option **eingeschaltet**, werden die Werte für pH(0) bzw. E(0) beim Überschreiten dieser Grenzen **orange** dargestellt.

Untere Grenze

-2.147E+9 ... 2.147E+9

pH-Elektrode: **6.500**

ISE: **-15 mV**

Untere Warngrenze für pH(0) bzw. E(0).

Obere Grenze

-2.147E+9 ... 2.147E+9

pH-Elektrode: **7.500**

ISE: **15 mV**

Obere Warngrenze für pH(0) bzw. E(0).

Eingreifgrenzen für pH(0) bzw. E(0)

ein, [aus]

Ist diese Option **eingeschaltet**, werden die Werte für pH(0) bzw. E(0) beim Überschreiten dieser Grenzen **rot** dargestellt.

Untere Grenze

-2.147E+9 ... 2.147E+9

pH: **6.000**

ISE: **-30 mV**

Untere Eingreifgrenze für pH(0) bzw. E(0).

Obere Grenze

-2.147E+9 ... 2.147E+9

pH: **8.000**

ISE: **30 mV**

Obere Eingreifgrenze für pH(0) bzw. E(0).

6.8 Unterfenster Common Variablen

6.8.1 Allgemeines

Unterfenster Common Variablen

Das Unterfenster **Common Variablen** enthält die Tabelle mit den konfigurierten Common Variablen. Es kann im Programmteil **Konfiguration** als Bestandteil der Konfigurationsansicht oder (falls nicht auf der Oberfläche vorhanden) mit **Ansicht, Schnellzugriff** in einem separaten Fenster angezeigt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrößert und verkleinert und auch maximiert werden.

Verwendung von Common Variablen

Common Variablen sind methodenübergreifende Variablen, die pro Client gespeichert und in Formeln unter der Bezeichnung '**CV.Name**' verwendet werden können. Sie werden entweder manuell in der Konfiguration eingegeben oder im Methodenablauf durch einen Befehl **CALC** zugewiesen.

6.8.2 Tabelle der Common Variablen

Common Variablen								
	Name ▲	Typ	Wert	Einheit	Zuweisungsdatum	Zuweisungsmethode	Anwender	Nächste Zuweisung
▶ 1	Blindwert	Zahl	0.568	µg/L	2004-11-01 16:34:13 UTC+1	manuell	doe	2004-11-15
2	Faktor	Zahl	2.368		2004-11-01 16:31:52 UTC+1	manuell	doe	

Inhalt

In der Tabelle der Common Variablen werden standardmässig die folgenden Informationen zu den Common Variablen angezeigt:

Name

Name der Common Variablen.

Typ

Typ der Common Variablen (**Zahl**, **Text** oder **Datum/Zeit**).

Wert

Wert der Common Variablen.

Einheit

Einheit der Common Variablen.

Zuweisungsdatum

Datum für die letzte Wertzuweisung für die Common Variable.

Zuweisungsmethode

Name der Methode, mit der die Wertzuweisung erfolgte.

Anwender

Kurzname des Anwenders, der bei der Wertzuweisung angemeldet war.

Nächste Zuweisung

Datum, an dem die nächste Wertzuweisung durchgeführt werden soll. Ist die Überwachung der Common Variable eingeschaltet und das eingestellte Datum kleiner als das aktuelle Datum (d.h. die Wertzuweisung wurde noch nicht durchgeführt), wird das Datum mit roter Schrift dargestellt.

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Spaltenanzeige...** können weiteren Spalten aus den Eigenschaften der Common Variablen angezeigt werden.

Hinweise

Bei Zeilen mit roten Einträgen wird zusätzlich der Hintergrund der Zeilennummer rot markiert.

Tabellenansicht

Die Tabelle der Common Variablen ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:**
Einstellen der Spaltenbreite
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:**
Einstellen der optimalen Spaltenbreite
- **Ziehen des Spaltentitels:**
Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mausursors auf dem Feld als Tooltip angezeigt.

Funktionen

Bearbeiten ▼

Das Menü **Bearbeiten** unterhalb der Tabelle der Common Variablen enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu...

Manuelles Hinzufügen einer neuen Common Variablen.

Löschen

Löschen der ausgewählten Common Variablen.

Eigenschaften...

Bearbeiten der ausgewählten Common Variablen.

Spaltenanzeige...


Spalten für Tabelle der Common Variablen definieren.

Drucken (PDF)...

Ausgabe der Tabelle der Common Variablen als PDF-Datei.

Spaltenanzeige

Mit **Bearbeiten, Spaltenanzeige...** wird das Fenster **Spaltenanzeige** geöffnet. Hier können die Spalten definiert werden, welche in der Tabelle der Common Variablen angezeigt werden sollen.

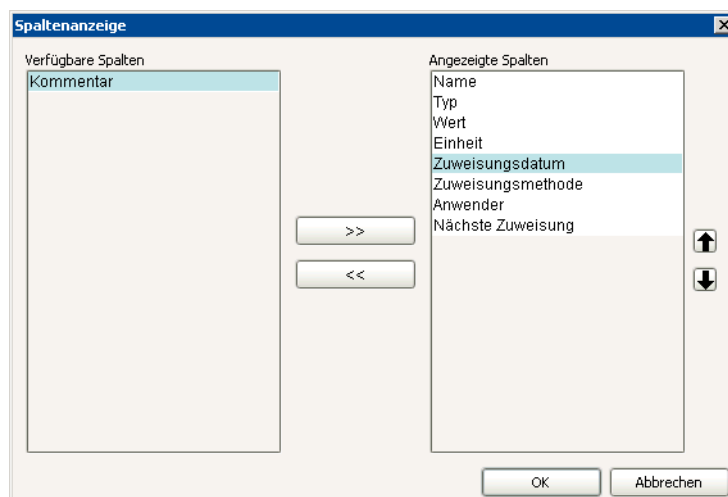


Verfügbare Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Tabelle der Common Variablen angezeigt werden können.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Tabelle der Common Variablen angezeigt werden. Standardmässig werden die Spalten **Name, Typ, Wert, Einheit, Zuweisungsdatum, Zuweisungsmethode, Anwender** und **Nächste Zuweisung** angezeigt. Die drei Spalten **Name, Typ** und **Sensortyp** sind immer vorhanden und können nicht entfernt werden.

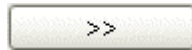

Hinzufügen der ausgewählten Spalte in die Tabelle.



Entfernen der ausgewählten Spalte aus der Tabelle.



Ändern der Reihenfolge der angezeigten Spalten durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach oben bzw. nach unten.

Neue Common Variable hinzufügen


Eine neue Common Variable wird manuell mit **Bearbeiten, Neu...** in die Tabelle der Common Variablen hinzugefügt. Dabei öffnet sich automatisch das Eigenschaftsfenster für das Bearbeiten der Common Variablen. Nach dem Schliessen des Eigenschaftsfensters wird die Common Variable in die Tabelle der Common Variablen eingetragen. Die Parameter können jederzeit mit **Bearbeiten, Eigenschaften** geändert werden.

Common Variable löschen

Mit **Bearbeiten, Löschen** wird die in der Tabelle ausgewählte Common Variable gelöscht.

Liste der Common Variablen drucken

Mit **Bearbeiten, Drucken (PDF)...** wird das Dialogfenster **Liste der Common Variablen drucken (PDF)** geöffnet.

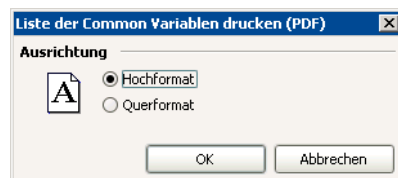

Ausrichtung

Hochformat

[ein], aus

Ausgabe der Tabelle der Common Variablen im Hochformat.

Querformat

ein, [aus]

Ausgabe der Tabelle der Common Variablen im Querformat.

OK

Die Tabelle der Common Variablen wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

6.8.3 Eigenschaften der Common Variablen

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten, Eigenschaften...** im Unterfenster **Common Variablen** wird das Eigenschaftsfenster für die in der Tabelle ausgewählte Common Variable geöffnet, in dem die Parameter der Common Variablen bearbeitet werden können. Es besteht aus den folgenden Registerkarten:

- **Common Variable**
Informationen zur Common Variablen wie Name, Typ, Wert, etc.
- **History**
Anzeige der letzten 10 Werte.

Common Variable

Name

50 Zeichen

Name der Common Variablen.

Typ

[Zahl], Text, Datum/Zeit

Auswahl des Typs für eine neue Common Variable. Für bestehende Common Variablen wird der Typ nur angezeigt und kann nicht editiert werden.

Wert

Zahl: **-1E+99 ... 1E+99**

Text: **256 Zeichen**

Datum: **Datumsauswahl**

Wert der Common Variablen. Dieser Wert kann in einer Methode durch einen **CALC** Befehl zugewiesen oder manuell eingetragen werden. Er steht bei Methoden, welche die Common Variable verwenden, als Variable **'CV.Name.VAL'** oder **'CV.Name'** (Kurzform) für Berechnungen zur Verfügung.

Bei Variablen vom Typ **Datum/Zeit** kann das Datum nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden.

Wert (Einheit)

20 Zeichen, ' leer', [mol/L], mmol/L, µmol/mL, g/L, mg/L, µg/mL, mg/mL, ppm, %, mEq/L

Bezeichnung der Einheit. Bei einer automatischen Wertzuweisung durch einen Berechnungsbefehl wird die Einheit automatisch hier eingetragen. Sie steht bei Methoden, welche die Common Variable verwenden, als Variable **'CV.Name.UNI'** für Berechnungen zur Verfügung.

Kommentar

256 Zeichen

Möglichkeit zur Eingabe von Bemerkungen zur Common Variable.

Zuweisungsdatum

Datum und Zeit der letzten Wertzuweisung, das bei jeder automatischen Wertzuweisung oder manuellen Eingabe automatisch eingetragen wird.

Hinweis

Bei einer manuellen Eingabe wird im Unterschied zur automatischen Wertzuweisung kein neues Datum eingetragen, wenn der Wert unverändert bleibt.

Zuweisungsmethode

Name der Methode, mit der die letzte Wertzuweisung durchgeführt wurde. Wenn der Wert manuell eingegeben wurde, wird hier **manuell** angezeigt.

Anwender

Kurzname des Anwenders, der während der Wertzuweisung angemeldet war bzw. den Wert von Hand eingetragen hat. Wenn nicht mit Anmeldung gearbeitet wird, wird automatisch der unter Windows angemeldete Anwender eingetragen.

Common Variable überwachen

ein, [aus]

Ist diese Option eingeschaltet, wird die Gültigkeit der Common Variablen überwacht.

Gültigkeitsdauer

0 ... [999] Tage

Gültigkeitsdauer der Common Variablen in Tagen. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Feld **Nächste Zuweisung** automatisch angepasst.

Nächste Zuweisung

Datumsauswahl, [Zuweisungsdatum + 999 Tage]

Datum, an dem die nächste Wertzuweisung erfolgen muss. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe *Allgemeine Programmfunktionen - Editieren - Datum wählen*) ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für die **Gültigkeitsdauer** automatisch angepasst.

Aktion

Wird bei der Überwachung der Common Variablen festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Meldung dokumentieren

Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer der Common Variablen abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen


Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die

Meldung, dass die Gültigkeitsdauer der Common Variablen abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen

Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

History

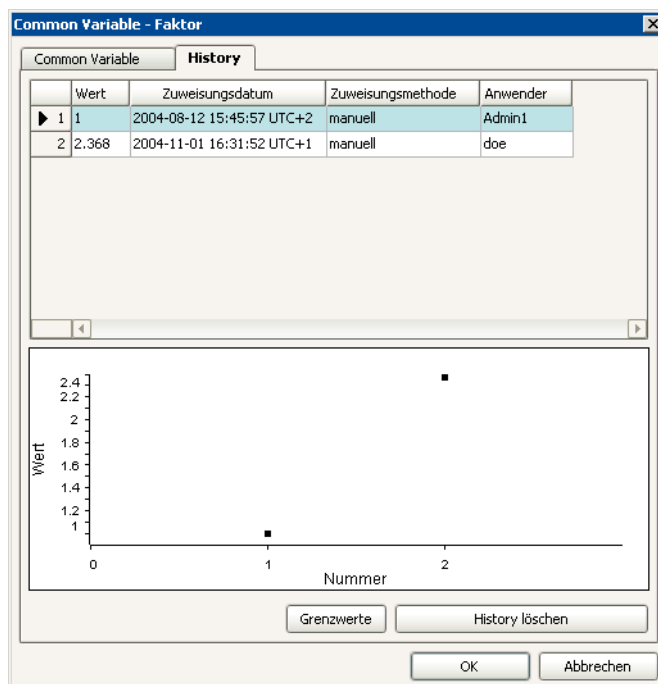

History-Tabelle

Die Tabelle enthält die 10 letzten Werte für die ausgewählte Common Variable und ist nicht editier- und sortierbar. Die einzelnen Werte werden nach Datum sortiert und zwar so, dass die aktuellste Zuweisung zuletzt aufgeführt wird.

Wert

Die Werte werden in folgenden Farben eingetragen:

- **Blau**, wenn die Werte automatisch durch eine Methode zugewiesen wurden.
- **Schwarz**, wenn die Werte manuell eingetragen wurden.
- **Orange**, wenn die Werte ausserhalb der Warngrenzen liegen.
- **Rot**, wenn die Werte ausserhalb der Eingreifgrenzen liegen

Bei Verletzung der Warn- oder Eingreifgrenzen wird zusätzlich die Zeilennummer orange bzw. rot hinterlegt.

Zuweisungsdatum

Datum und Zeit der Wertzuweisung.

Zuweisungsmethode

Name der Methode, mit der die Wertzuweisung durchgeführt wurde. Wenn die Werte manuell eingegeben wurden, wird hier **manuell** angezeigt.

Anwender

Kurzname des Anwenders, der während der Wertzuweisung angemeldet war bzw. die Werte von Hand eingetragen hat. Wenn nicht mit Anmeldung gearbeitet wurde, wird automatisch der unter Windows angemeldete Anwender eingetragen.

History-Grafik

In der Grafik werden die 10 letzten Werte für die ausgewählte Common Variable dargestellt. Die Werte werden wie in der History-Tabelle in unterschiedlichen Farben dargestellt:

- **Blau**, wenn der Wert automatisch durch eine Methode bestimmt wurde.
- **Schwarz**, wenn der Wert manuell eingetragen wurde.

Wenn Grenzen definiert sind, so werden die Warngrenzen **orange** und die Eingreifgrenzen **rot** eingezeichnet.

Hinweis

Die History-Grafik kann mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Kopieren** in die Zwischenablage kopiert werden.

Grenzwerte


Öffnen des Dialogfensters **Grenzwerte Common Variable**, in dem die Warn- und Eingreifgrenzen für die Common Variablen definiert werden können. Diese Grenzen gelten nur für die Grafik, es findet keine Überwachung während der Wertzuweisung statt.

History löschen

Löschen der History.

History - Grenzwerte

Im Dialogfenster **Grenzwerte Common Variable** können Warn- und Eingreifgrenzen für den Wert der Common Variablen definiert werden. Wenn Sie Grenzen festgelegt haben, werden diese in der Grafik für Warngrenzen **orange** und für Eingreifgrenzen **rot** eingezeichnet. Es wird aber nicht überwacht, ob die Grenzen eingehalten werden, d.h. mit dem Unter- oder Überschreiten der Grenzwerte sind keinerlei Aktionen verbunden.

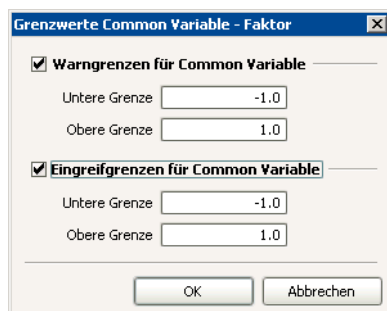

Warngrenzen für Common Variable

ein, [aus]

Ist diese Option **eingeschaltet**, werden die Werte der Common Variablen beim Überschreiten dieser Grenzen **orange** dargestellt.

Untere Grenze

-2.147E+9 ... 2.147E+9, ['leer']

Untere Warngrenze für Common Variable.

Obere Grenze

-2.147E+9 ... 2.147E+9, ['leer']

Obere Warngrenze für Common Variable.

Eingreifgrenzen für Common Variable

ein, [aus]

Ist diese Option **eingeschaltet**, werden die Werte der Common Variablen beim Überschreiten dieser Grenzen **rot** dargestellt.

Untere Grenze

-2.147E+9 ... 2.147E+9, ['leer']

Untere Eingreifgrenze für Common Variable.

Obere Grenze

-2.147E+9 ... 2.147E+9, ['leer']

Obere Eingreifgrenze für Common Variable.

6.9 Unterfenster Rackdaten

6.9.1 Allgemeines


Unterfenster Rackdaten

Das Unterfenster **Rackdaten** enthält die Racktabelle mit allen für den Client definierten Probenracks für Metrohm-Probenwechsler. Es kann im Programmteil **Konfiguration** als Bestandteil der Konfigurationsansicht oder (falls nicht auf der Oberfläche vorhanden) mit **Ansicht, Schnellzugriff** in einem separaten Fenster angezeigt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrößert und verkleinert und auch maximiert werden.

Standard-Racks

Die Racktabelle enthält standardmässig alle von Metrohm lieferbaren Probenracks für Probenwechsler.

6.9.2 Racktabelle

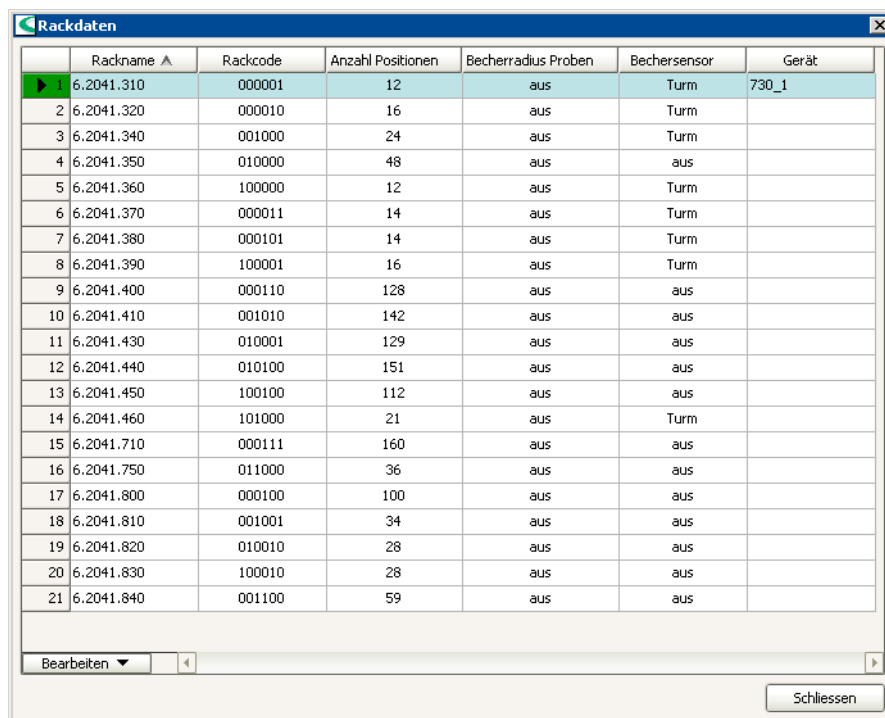

	Rackname ▲	Rackcode	Anzahl Positionen	Becherradius Proben	Bechersensor	Gerät
1	6.2041.310	000001	12	aus	Turm	730_1
2	6.2041.320	000010	16	aus	Turm	
3	6.2041.340	001000	24	aus	Turm	
4	6.2041.350	010000	48	aus	aus	
5	6.2041.360	100000	12	aus	Turm	
6	6.2041.370	000011	14	aus	Turm	
7	6.2041.380	000101	14	aus	Turm	
8	6.2041.390	100001	16	aus	Turm	
9	6.2041.400	000110	128	aus	aus	
10	6.2041.410	001010	142	aus	aus	
11	6.2041.430	010001	129	aus	aus	
12	6.2041.440	010100	151	aus	aus	
13	6.2041.450	100100	112	aus	aus	
14	6.2041.460	101000	21	aus	Turm	
15	6.2041.710	000111	160	aus	aus	
16	6.2041.750	011000	36	aus	aus	
17	6.2041.800	000100	100	aus	aus	
18	6.2041.810	001001	34	aus	aus	
19	6.2041.820	010010	28	aus	aus	
20	6.2041.830	100010	28	aus	aus	
21	6.2041.840	001100	59	aus	aus	

Buttons: Bearbeiten, Schliessen

Inhalt

In der Racktabelle werden standardmässig die folgenden Informationen zu den konfigurierten Racks angezeigt:

Rackname

Name des Racks.

Rackcode

Rackcode des Racks.

Anzahl Positionen

Anzahl Probenpositionen auf dem Rack.

Becherradius Proben

Radius der Becher auf dem Rack.

Bechersensor

Definition des Bechersensors für das Rack.

Geräte

Anzeige der Geräte, auf denen das Rack aufgesetzt ist.

Tabellenansicht

Die Racktabelle ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:**
Einstellen der Spaltenbreite
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:**
Einstellen der optimalen Spaltenbreite
- **Ziehen des Spaltentitels:**
Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mausursors auf dem Feld als Tooltip angezeigt.

Bei Probenracks, welche auf einem Sample Processor aufgesetzt sind und automatisch erkannt werden, wird in der Spalte Geräte der entsprechende Gerätenamen angezeigt. Zusätzlich wird die Zeilennummer auf grünem Hintergrund dargestellt.

Ist ein Rack für eine laufende Bestimmung oder die manuelle Bedienung reserviert, so wird diese Zeile in grauer Schrift dargestellt und das Rack ist für das Bearbeiten gesperrt, bis die Bestimmung beendet ist.

Funktionen



Das Menü **Bearbeiten** unterhalb der Lösungstabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu...

Manuelles Hinzufügen eines neuen Racks.

Löschen

Löschen des ausgewählten Racks.

Eigenschaften...


Bearbeiten des ausgewählten Racks.

Drucken (PDF)...

Ausgabe der Racktabelle als PDF-Datei.

Neues Rack hinzufügen

Ein neues Rack kann nur als Kopie eines bereits vorhandenen Racks unter einem neuen Racknamen und mit einem neuen Rackcode erstellt werden. Mit **Bearbeiten**, **Neu...** öffnet sich das Dialogfenster **Neues Rack**.

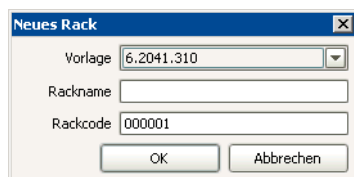

Vorlage

Alle vorhandenen Racks, [in der Tabelle ausgewähltes Rack]

Auswahl des Racks, das als Vorlage für das neue Rack dienen soll.

Rackname

25 Zeichen

Name für das neue Rack. Der gewählte Name darf noch nicht vorhanden sein.

Rackcode

6-stelliges Bitmuster aus 0 und 1, [Code des selektierten Racks]


Code des neuen Racks. Der gewählte Rackcode darf noch nicht vorhanden sein.

Rack löschen

Mit **Bearbeiten, Löschen** wird das in der Rackliste ausgewählte Rack gelöscht.

Rackliste drucken

Mit **Bearbeiten, Drucken (PDF)** oder dem entsprechenden Symbol wird das Dialogfenster **Rackliste drucken (PDF)** geöffnet.

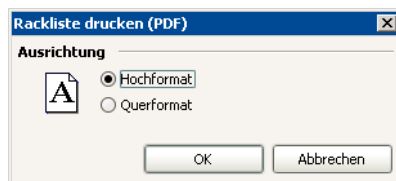

Ausrichtung

Hochformat


[ein], aus

Ausgabe der Racktabelle im Hochformat.

Querformat

ein, [aus]

Ausgabe der Racktabelle im Querformat.

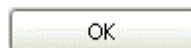

Die Racktabelle wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, von wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

6.9.3 Rackeigenschaften

Rackname

Anzeige des Namens des aufgesetzten Racks. Ist kein Rack aufgesetzt, wird "-----" angezeigt.

Rackcode

Anzeige des Rackcodes des aufgesetzten Racks. Der Rackcode entspricht der Magnetanordnung auf der Unterseite des Racks und wird durch den Sample Processor zur Rackerkennung ausgelesen. Ist kein Rack aufgesetzt, ist die Anzeige leer.

Anzahl Positionen

Anzeige der Anzahl Positionen des aufgesetzten Racks. Ist kein Rack aufgesetzt, ist die Anzeige leer.

Die Parameter für das aufgesetzte Rack werden auf den folgenden 3 Registerkarten definiert:

- **Rackparameter**
Definition von Parametern, die für alle Rackpositionen gültig sind.
- **Liftpositionen**
Definition der Arbeits-, Spül-, Dreh- und Spezialposition für Turm 1 und Turm 2 (wenn vorhanden).
- **Spezialbecher**
Einstellungen für alle Spezialbecher des aufgesetzten Racks.

Rackparameter

Rackdaten

Rackname: 6.2041.310

Rackcode: 000001

Anzahl Positionen: 12

Rackparameter | Liftpositionen | Spezialbecher

Becherradius Proben: aus mm

Bechersensor: Turm

Rackoffset: 0.00 °

OK Abbrechen

Becherradius Proben

1.0 ... 100.0 mm, [aus]

Radius der Probenbecher auf dem Rack. Wird der Lift auf die Arbeitsposition gefahren, wird dieser Wert mit dem für jeden Turm spezifisch definierbaren Parameter **Min. Becherradius** (siehe Eigenschaften Turm #) verglichen. Bei **Becherradius Proben < Min. Becherradius** wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Mit **aus** wird der Becherradius nicht überprüft.

Bechersensor

[Turm], Schwenkarm, aus

Beim Anfahren einer Probenposition mit dem Befehl **MOVE** wird mit dem Bechersensor (**Turm, Schwenkarm**) überprüft, ob ein Probenbecher vorhanden ist oder nicht. Mit **aus** findet keine Überprüfung statt. Für die Option **Schwenkarm** muss ein Swing Head mit Bechersensor installiert sein und für den Lift eine passende Arbeitsposition mit Becherkontakt definiert werden, da diese zur Bechererkennung angefahren wird.

Mit dem Parameter **Bechertest** im Befehl **MOVE** wird festgelegt, ob die Bestimmung beim Fehlen eines Bechers mit oder ohne der Anzeige einer entsprechenden Meldung abgebrochen werden soll und ob die Serie fortgesetzt bzw. ebenfalls abgebrochen werden soll.

Rackoffset

-5.00 ... [0.00] ... 5.00 °

Der Rackoffset ist ein fertigungsbedingter Toleranzwert vom Rackoberteil zum Rackunterteil. Der Wert des Rackoffsets wird bei der Rack-Justierung ermittelt und hier angezeigt. Bei Bedarf kann er editiert werden.

Liftpositionen

Rackdaten

Rackname: 6.2041.310
 Rackcode: 000001
 Anzahl Positionen: 12

Rackparameter **Liftpositionen** **Spezialbecher**

Turm 1

Arbeitsposition: 0 mm
 Spülposition: 0 mm
 Drehposition: 0 mm
 Spezialposition: 0 mm

Turm 2

Arbeitsposition: 0 mm
 Spülposition: 0 mm
 Drehposition: 0 mm
 Spezialposition: 0 mm

OK Abbrechen

Turm 1

Definition der Liftpositionen für Turm 1. Diese gelten für alle Rackpositionen ausser denjenigen, welche als Spezialbecher definiert sind.

Arbeitsposition

[0] ... 235 mm

Arbeitsposition für Lift 1. Auf dieser Liftposition sind Elektroden, Rührer und Bürettenspitzen optimal zum Arbeiten positioniert.

Spülposition

[0] ... 235 mm

Spülposition für Lift 1. Diese Liftposition wird zum Spülen der Elektroden verwendet.

Drehposition

[0] ... 235 mm

Drehposition für Lift 1. Bei jeder Drehbewegung des Racks wird der Lift auf diese Position gefahren, sofern er sich auf einer niedrigeren Liftposition befindet. Befindet sich der Lift auf einer höheren Position als der hier definierten, erfolgt die Drehbewegung auf der aktuellen Liftposition. Die Drehposition muss also so gewählt werden, dass jederzeit ein sicheres Drehen über das gesamte Rack möglich ist.

Spezialposition

[0] ... 235 mm

Spezialposition für Lift 1. Diese zusätzlich definierbare Position kann z.B. beim Pipettieren zum knappen Eintauchen in die Probenlösung verwendet werden.

Turm 2

Definition der Liftpositionen für Turm 2. Diese gelten für alle Rackpositionen ausser denjenigen, welche als Spezialbecher definiert sind.

Arbeitsposition

[0] ... 235 mm

Arbeitsposition für Lift 2. Auf dieser Liftposition sind Elektroden, Rührer und Bürettenspitzen optimal zum Arbeiten positioniert.

Spülposition

[0] ... 235 mm

Spülposition für Lift 2. Diese Liftposition wird zum Spülen der Elektroden verwendet.

Drehposition

[0] ... 235 mm

Drehposition für Lift 2. Bei jeder Drehbewegung des Racks wird der Lift auf diese Position gefahren, sofern er sich auf einer niedrigeren Liftposition befindet. Befindet sich der Lift auf einer höheren Position als der hier definierten, erfolgt die Drehbewegung auf der aktuellen Liftposition. Die Drehposition muss also so gewählt werden, dass jederzeit ein sicheres Drehen über das gesamte Rack möglich ist.

Spezialposition

[0] ... 235 mm

Spezialposition für Lift 2. Diese zusätzlich definierbare Position kann z.B. beim Pipettieren zum knappen Eintauchen in die Probenlösung verwendet werden.

Spezialbecher

Spezialbecher	Rackposition	Arbeitsposition Turm 1	Arbeitsposition Turm 2	Becherradius	Bechersensor
1	0	0	0	aus	Turm
2	0	0	0	aus	Turm
3	0	0	0	aus	Turm
4	0	0	0	aus	Turm
5	0	0	0	aus	Turm
6	0	0	0	aus	Turm
7	0	0	0	aus	Turm
8	0	0	0	aus	Turm
9	0	0	0	aus	Turm
10	0	0	0	aus	Turm
11	0	0	0	aus	Turm
12	0	0	0	aus	Turm
13	0	0	0	aus	Turm
14	0	0	0	aus	Turm
15	0	0	0	aus	Turm
16	0	0	0	aus	Turm

In der Tabelle werden die Daten aller Spezialbecher des aufgesetzten Racks in tabellarischer Form angezeigt. Jedem Spezialbecher kann eine beliebige Rackposition zugeordnet werden. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar.

Hinweis

Spezialbecher sollten bevorzugt auf hohe Rackpositionen gesetzt werden, um mit Probenreihen bei der Rackposition 1 beginnen zu können. Rackpositionen, die als Spezialbecher definiert sind, stehen nicht mehr als Probenpositionen zur Verfügung. Für jeden Spezialbecher kann eine spezifische Arbeitsposition für Turm 1 und Turm 2 (falls vorhanden) definiert werden. Die Dreh-, Spül- und Spezialposition des betreffenden Turmes werden von den allgemeinen Rackpositionen übernommen.

In der Tabelle werden die folgenden Spalten angezeigt:

Spezialbecher

Nummer des Spezialbechers für das ausgewählte Rack.

Rackposition

Nummer der Rackposition für den Spezialbecher.

Arbeitsposition Turm 1

Arbeitsposition für den Spezialbecher an Turm 1.

Arbeitsposition Turm 2

Arbeitsposition für den Spezialbecher an Turm 2.

Becherradius

Radius des Spezialbechers.

Bechersensor


Definition, ob und welcher Bechersensor für den Spezialbecher verwendet werden soll.

Bearbeiten

Öffnen des Dialogfensters **Spezialbecher #** zum Bearbeiten der Daten für den ausgewählten Spezialbecher.

Spezialbecherkonfiguration

Im Dialogfenster **Spezialbecher #** können die Parameter für den in der Tabelle der Spezialbecher ausgewählten Spezialbecher definiert werden.

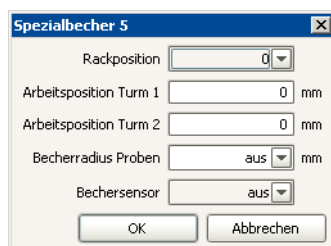

Rackposition

[0] ... n (n ist rackabhängig)

Nummer der Rackposition für den ausgewählten Spezialbecher.

Hinweis

Spezialbecher sollten bevorzugt auf hohe Rackpositionen gesetzt werden, um mit Probenreihen bei der Rackposition 1 beginnen zu können. Rackpositionen, die als Spezialbecher definiert sind, stehen nicht mehr als Probenpositionen zur Verfügung. Sie werden beim automatischen Anfahren einer Probenposition übersprungen.

Arbeitsposition Turm 1

[0] ... 235 mm

Arbeitsposition des ausgewählten Spezialbechers an Turm 1.

Arbeitsposition Turm 2

[0] ... 235 mm

Arbeitsposition des ausgewählten Spezialbechers an Turm 2.

Becherradius Proben

1.0 ... 100.0 mm, [aus]

Radius der ausgewählten Spezialbechers auf dem Rack. Wird der Lift auf die Arbeitsposition gefahren, wird dieser Wert mit dem für jeden Turm spezifisch definierbaren Parameter **Min. Becherradius** (siehe *Eigenschaften Turm #*) verglichen. Bei **Becherradius Proben** < **Min. Becherradius** wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Mit **aus** wird der Becherradius nicht überprüft.

Bechersensor**[Turm], Schwenkarm, aus**

Beim Anfahren des ausgewählten Spezialbechers mit dem Befehl **MOVE** wird mit dem Bechersensor (**Turm, Schwenkarm**) überprüft, ob der Spezialbecher vorhanden ist oder nicht. Mit **aus** findet keine Überprüfung statt. Für die Option **Schwenkarm** muss ein Swing Head mit Bechersensor installiert sein und für den Lift eine passende Arbeitsposition mit Becherkontakt definiert werden, da diese zur Bechererkennung angefahren wird.

Mit dem Parameter **Bechertest** im Befehl **MOVE** wird festgelegt, ob die Bestimmung beim Fehlen eines Bechers mit oder ohne der Anzeige einer entsprechenden Meldung abgebrochen werden soll und ob die Serie fortgesetzt bzw. ebenfalls abgebrochen werden soll.

Kapitel 7 Index

2

21 CFR 11.....8, 529, 533, 535

7

712 Konduktometer

Allgemeine Eigenschaften.....579, 583, 588, 591,
594, 598, 605, 614, 619, 628, 632, 635
Eigenschaften.....590
GLP-Test.....582, 586, 589, 592, 596, 604, 612,
618, 626, 630, 634, 638
RS232.....586, 589, 592, 612, 617, 626

730 Sample Changer

Allgemeine Eigenschaften.....579, 583, 588, 591,
594, 598, 605, 614, 619, 628, 632, 635
Dosierer.....617, 624
Eigenschaften.....613
GLP-Test.....582, 586, 589, 592, 596, 604, 612,
618, 626, 630, 634, 638
Manuelle Bedienung.....71
Rack.....601, 610, 616, 621
RS232.....586, 589, 592, 612, 617, 626
Türme.....615

756/831 Coulometer

Allgemeine Eigenschaften.....579, 583, 588, 591,
594, 598, 605, 614, 619, 628, 632, 635
Eigenschaften.....587
GLP-Test.....582, 586, 589, 592, 596, 604, 612,
618, 626, 630, 634, 638
RS232.....586, 589, 592, 612, 617, 626

774 Oven Sample Processor

Allgemeine Eigenschaften.....579, 583, 588, 591,
594, 598, 605, 614, 619, 628, 632, 635
Dosierer.....617, 624
Eigenschaften.....619
Gas.....625
GLP-Test.....582, 586, 589, 592, 596, 604, 612,
618, 626, 630, 634, 638
Manuelle Bedienung.....71
Ofen.....624
Rack.....601, 610, 616, 621
RS232.....586, 589, 592, 612, 617, 626
Turm.....621

778/789 Sample Processor

Allgemeine Eigenschaften.....579, 583, 588, 591,
594, 598, 605, 614, 619, 628, 632, 635
Eigenschaften.....605
Externe Positionen.....601, 609
GLP-Test.....582, 586, 589, 592, 596, 604, 612,
618, 626, 630, 634, 638
Manuelle Bedienung.....71
MSB.....581, 595, 603, 611
Rack.....601, 610, 616, 621
RS232.....586, 589, 592, 612, 617, 626
Schwenkarm.....600, 608
Turm.....599, 607

8

814/815 USB Sample Processor

Allgemeine Eigenschaften.....579, 583, 588, 591,
594, 598, 605, 614, 619, 628, 632, 635
Eigenschaften.....597
GLP-Test.....582, 586, 589, 592, 596, 604, 612,
618, 626, 630, 634, 638
Manuelle Bedienung.....71
MSB.....581, 595, 603, 611
Rack.....601, 610, 616, 621
Schwenkarm.....600, 608
Turm.....599, 607

846 Dosing Interface

Allgemeine Eigenschaften.....579, 583, 588, 591,
594, 598, 605, 614, 619, 628, 632, 635
Eigenschaften.....593
GLP-Test.....582, 586, 589, 592, 596, 604, 612,
618, 626, 630, 634, 638
MSB.....581, 595, 603, 611

A

Abbruchbedingungen.....328, 342, 350, 360, 368,
370, 371, 372, 379, 386, 389, 394, 402, 404, 410

Ablauf

Bestimmungsserie.....121, 127
Einzelbestimmung.....110, 117
Fortführen.....111, 117, 122, 127
Starten.....111, 122
Stoppen.....111, 122
Unterbrechen.....111, 117, 122, 127

Ablauftest.....106

Abmeldung

Automatisch abmelden.....9
Manuell abmelden.....9

Absolutwert.....42

ADD

Eigenschaften.....463
Parameter.....464
Übersicht.....462

Addition.....28

Alle Daten löschen.....317

AND.....33

Änderungsbegründung

Bestimmung.....254, 533
Methode.....292, 533
Probedaten.....115, 510, 533

Änderungskommentar

Audit Trail.....533
Bestimmungen.....254
Methode.....292, 533
Probedaten.....115, 510, 533

Anmeldung

Allgemeines.....8
Anmelden.....9

- Automatisch abmelden.....9
- E-Mail senden.....532
- Manuell abmelden.....9
- Sicherheitseinstellungen.....529
- Anmerkung.....112, 123
- Ansicht
 - Arbeitsplatzansicht.....86, 312
 - Beim Beenden speichern.....559
 - Datenbankansicht.....157
 - Exportieren.....549
 - Importieren.....550
 - Konfigurationsansicht.....525
 - Laden.....88, 160, 527
 - Layout ändern.....87, 158, 526
 - Löschen.....89, 160, 528
 - Speichern.....88, 159, 527
 - Standardansichten.....541
 - Umbenennen.....89, 160, 528
- Anwender
 - Allgemeines.....537
 - Anzeige.....112, 123
 - Details.....543
 - Hinzufügen.....543, 545
 - Kurzname.....543
 - Optionen.....541
 - Status.....543
 - Unterschriftsberechtigungen.....540
 - Voller Name.....543
 - Zugriffsrechte.....539
- Anwendergruppen
 - Allgemeines.....537
 - Details.....538
 - Hinzufügen.....542
 - Kopieren.....542
 - Löschen.....543
 - Optionen.....541
 - Umbenennen.....542
 - Unterschriftsberechtigungen.....540
 - Zugriffsrechte.....539
- Anwendername
 - Kurzname.....9, 543
 - Voller Name.....543
- Anwenderverwaltung
 - Allgemeines.....537
 - Anwendergruppen.....538
 - Exportieren.....549
 - Funktionen.....537
 - Importieren.....550
 - Optionen.....541
 - Unterschriftsberechtigungen.....540
 - Zugriffsrechte.....539
- Anzahl Einzelbestimmungen.....312
- Anzahl Puffer.....454
- Anzahl Standards.....459
- Applikationsnotiz.....146, 313
- Arbeitsplatz
 - Allgemeines.....81
 - Ansichten.....86
 - Auswahl.....91
 - Bearbeiten.....90
 - Eigenschaften.....90
 - Einzeln anzeigen.....91
 - Elemente.....81
 - Funktionen.....85
 - Menüleiste.....81
 - Nebeneinander anzeigen.....91
 - Neu erstellen.....90
 - Oberfläche.....81
 - Schliessen.....91
 - Symbol.....81
 - Symbolleiste.....84
 - Untereinander anzeigen.....91
 - Unterfenster.....84
 - Unterfenster Ablauf.....110
 - Unterfenster Liveanzeige.....145
 - Unterfenster Methode.....143
 - Unterfenster Report.....149
- Arbeitsposition.....75, 599, 601, 607, 609, 623, 683, 684, 685
- Arbeitsprobentabelle
 - Abarbeiten.....139
 - Anzeige.....136
 - Bearbeiten.....130
 - Bearbeiten (Eigenschaften).....138
 - Bearbeiten sperren.....138
 - Datenimport.....140
 - Drucken.....135
 - Eigenschaften.....136
 - Funktionen.....130
 - Hintergrundfarben.....125, 130
 - Kommentar.....142
 - Laden.....129
 - Neu erstellen.....129
 - Probedaten bearbeiten.....132
 - Probedaten importieren.....134
 - Speichern.....134
- ASCII-Tabelle.....55
- Audit Trail
 - Aktualisieren.....570
 - Allgemeines.....561
 - Archivieren.....571
 - Definition.....561
 - Drucken.....572
 - Exportieren.....570
 - Filter entfernen.....570
 - Filter speichern.....569
 - Filterauswahl.....563
 - Filterbedingung.....568
 - Filtern.....566
 - Funktionen.....564
 - Letzter Filter.....567
 - Löschen.....571
 - Menüleiste.....561
 - Navigationsleiste.....563
 - Oberfläche.....561
 - Öffnen.....564
 - Organisation.....561
 - Schnellfilter.....567
 - Sicherheitseinstellungen.....533
 - Spaltenanzeige.....566
 - Spezialfilter.....567
 - Symbolleiste.....563
 - Tabelle.....564
 - Überwachung.....573
 - Unterschriftsberechtigungen.....540
- Aufheizdauer.....482
- Aufruf.....512, 513
- Ausgangsleitungen
 - CTRL-Befehl.....497
 - Manuelle Bedienung.....70
 - Vorlagen.....556
- Ausgangssignal.....497
- Auswertungen
 - Auswertungslinien anzeigen.....273

Fix-Endpunkt-Auswertung.....333, 345, 351, 363,
 368, 370, 371, 372, 381, 386, 389, 394, 403,
 404, 411, 419, 425, 429, 434, 440, 449
 Knickpunkt-Auswertung.....333, 345, 351, 363, 368,
 370, 371, 372, 413, 419, 425, 429, 434, 440,
 449
 Manuelle Kurvenauswertung.....247
 Maximum-Auswertung.....333, 345, 351, 363, 368,
 370, 371, 372, 381, 386, 389, 394, 403, 404,
 413, 419, 425, 429, 434, 440, 443, 449
 Minimum-Auswertung.....333, 345, 351, 363, 368,
 370, 371, 372, 381, 386, 389, 394, 403, 404,
 413, 419, 425, 429, 434, 440, 443, 449
 pK/HNP-Auswertung.....333, 345, 351, 363, 368,
 370, 371, 372, 412
 Potentiometrische Auswertung.....329, 343, 350,
 361, 368, 370, 371, 372
 Weitere Auswertungen.....333, 345, 351, 363, 368,
 370, 371, 372, 381, 386, 389, 394, 403, 404,
 411
 Weitere Messwerte.....335, 347, 353, 365, 369,
 370, 371, 372, 382, 387, 389, 395, 403, 404,
 412, 421, 427, 429, 435, 442, 444, 446, 451
 Automationsbefehle.....471
 Automatisches Konditionieren.....312
 Autostart.....123

B

Barcodeleser
 Allgemeine Eigenschaften.....579, 583, 588, 591,
 594, 598, 605, 614, 619, 628, 632, 635
 Datenimport.....101, 120, 140
 Eigenschaften.....631
 Einstellungen.....633
 GLP-Test.....582, 586, 589, 592, 596, 604, 612,
 618, 626, 630, 634, 638
 Verbindung testen.....633
 Bausteine
 Anzahl Seiten.....190
 Bausteinleiste.....176
 Bearbeiten.....180
 Bild.....191
 Datenfeld.....185
 Datumsfeld.....187
 Einfügen.....179
 Fixreport.....191
 Kalibrierkurvenfeld.....199
 Kurvenfeld.....193, 194, 195, 197, 198
 Linie.....192
 Rechteck.....193
 Seitenzahl.....189
 Symbolleiste.....176
 Textfeld.....184
 Zeitfeld.....188
 Becherradius.....599, 607, 623, 678, 682, 684, 685
 Bechersensor.....615, 621, 623, 678, 682, 684
 Bechertest.....472
 Bedienung.....2
 Bedienungselemente
 Anzeigen.....118, 136
 Bestimmungsserie.....122
 Einzelbestimmung.....111
 Befehle
 Abbrechen.....144, 501
 Allgemeines.....308

Alphabetische Übersicht.....309
 Anhalten.....501
 Ausschneiden.....288
 Auswählen.....288
 Automationsbefehle.....471
 Bearbeiten.....309
 Darstellung.....308
 Darstellung im Ablauf.....143
 Definition.....308
 Dosierbefehle.....462
 Eigenschaften.....289
 Einfügen.....287, 288
 Formeleingabe.....289
 Fortführen.....501
 Kommentar.....289
 Kopieren.....288
 Löschen.....289
 Messbefehle.....414
 Resultatbefehle.....485
 Spurbefehle.....311
 Titrationsbefehle.....320
 Variablen.....19
 Verschieben.....288
 Verschiedene Befehle.....509
 Zusammenfassen.....517
 Befehlsvariablen.....19
 Bestimmungen
 Aktualisieren.....220
 Alle Statistikdatensätze anzeigen.....226
 Alte Version aktuell machen.....234
 Änderungskommentar.....254, 533
 Auswahl.....219
 Automatisch wiederholen.....119
 Bestimmungsübersicht.....216
 Exportieren.....230
 Filtern.....223
 Fortführen.....111, 122
 Funktionen.....220
 Geräteinformationen.....260
 History anzeigen.....234
 Importieren.....230
 Informationen.....256
 Kalibrierkurve anzeigen.....234
 Kommentar.....221, 263
 Konfiguration.....260
 Kontrollkarte.....235
 Kurven überlagern.....237
 Kurvenanzeige.....268
 Löschen.....231
 Meldungen.....262
 Methode anzeigen.....233
 Nachbearbeiten.....239
 Report drucken.....232
 Sensorinformationen.....260
 Starten.....111, 122
 Status.....256
 Stoppen.....111, 122
 Suchen.....221
 Unterbrechen.....111, 122
 Unterschrift 1.....227
 Unterschrift 2.....228
 Unterschriften.....256
 Unterschriften 2 löschen.....229
 Unterschriften anzeigen.....229
 Unterschriftsberechtigungen.....540
 Unterschriftenregeln.....226
 Variablen.....24
 Version.....234, 256

Bestimmungsablauf
 Bestimmungsserie.....126
 Einzelbestimmung.....115
 Bestimmungs-ID.....116, 127
 Bestimmungsparameter
 Anzeige.....118, 136
 Bestimmungsserie.....123
 Einzelbestimmung.....112
 Bestimmungsserie
 Abarbeiten.....139
 Ablauftest.....106
 Anzeige.....136
 Bearbeiten.....138
 Bedienungselemente.....122
 Bestimmungsablauf.....126
 Bestimmungsparameter.....123
 Datenimport.....140
 Eigenschaften.....136
 Hauptablauf.....127
 Kommentar.....142
 Methodenstart.....127
 Nachkonditionieren.....128
 Probedaten.....125, 132
 Probedaten laden.....126
 Starttest.....126
 Statusanzeige.....123
 Übersicht.....121
 Vorkonditionieren.....127
 Bestimmungsübersicht
 Aktualisieren.....216, 220
 Allgemeines.....216
 Datenanzeige.....216
 Datensatzauswahl.....219
 Drucken.....231
 Filterauswahl.....218
 Funktionen.....220
 Navigationsleiste.....218
 Spaltenanzeige.....217
 Tabellennavigation.....219
 Bestimmungsvariablen.....24

C

CAL LOOP Conc
 Eigenschaften.....459
 Übersicht.....459
 CAL LOOP pH
 Eigenschaften.....454
 Übersicht.....454
 CAL MEAS Conc
 Allgemein/Hardware.....460
 Messparameter.....461
 Übersicht.....460
 CAL MEAS pH
 Allgemein/Hardware.....456
 Messparameter.....458
 Übersicht.....456
 CALC
 Resultattabelle.....486
 Übersicht.....485
 CALL
 Aufruf.....513
 Eigenschaften.....512
 Übersicht.....512
 Case.....53

Common Variablen
 Allgemeines.....670
 Berechnung in CALC-Befehl.....491
 Eigenschaften bearbeiten.....673
 Eingreifgrenzen.....676
 Exportieren.....549
 History.....675
 History-Grenzwerte.....676
 Importieren.....550
 Informationen.....260
 Liste drucken.....672
 Löschen.....672
 Neue Common Variable hinzufügen.....672
 Parameter.....673
 Spaltenanzeige.....671
 Tabelle.....670
 Überwachung.....673
 Unterfenster.....670
 Verwendung im Formel-Editor.....26
 Warngrenzen.....676
 Cont-Taste.....111, 122
 CSV-Export.....213
 CTRL
 Eigenschaften.....497
 Übersicht.....497

D

DATABASE
 Eigenschaften.....494
 Übersicht.....494
 Datenbank
 Allgemeine Informationen.....166
 Allgemeines.....151
 Ansichten.....157
 Bestimmungsdaten speichern.....494
 Datenbankauswahl.....162
 Eigenschaften.....166
 Einführung.....3
 Einzelne Datenbank anzeigen.....162
 Erstellen.....165
 Funktionen.....157
 Informationen.....255
 Kurven.....268
 Löschen.....166
 Menüleiste.....152
 Nebeneinander anzeigen.....162
 Oberfläche.....151
 Öffnen.....161
 Report drucken.....232
 Resultate.....264
 Schliessen.....163
 Sicherung.....167, 169
 Symbolleiste.....155
 Überwachung.....168
 Umbenennen.....165
 Untereinander anzeigen.....162
 Unterfenster.....156
 Verwalten.....164
 Wiederherstellen.....169
 Zugriffsrechte.....167
 Datenimport.....101, 120, 140
 Datum.....57
 Dekadischer Logarithmus.....41
 DET
 DET Ipol.....347
 DET pH.....321

DET U.....	337
DET Upol.....	353
Übersicht.....	320
DET Ipol	
Abbruchbedingungen.....	350
Allgemein/Hardware.....	348
Potentiometrische Auswertung.....	350
Startbedingungen.....	350
Titrationsparameter.....	350
Übersicht.....	347
Weitere Auswertungen.....	351
Weitere Messwerte.....	353
DET pH	
Abbruchbedingungen.....	328
Allgemein/Hardware.....	322
Potentiometrische Auswertung.....	329
Startbedingungen.....	324
Titrationsparameter.....	326
Übersicht.....	321
Weitere Auswertungen.....	333
Weitere Messwerte.....	335
DET U	
Abbruchbedingungen.....	342
Allgemein/Hardware.....	338
Potentiometrische Auswertung.....	343
Startbedingungen.....	340
Titrationsparameter.....	342
Übersicht.....	337
Weitere Auswertungen.....	345
Weitere Messwerte.....	347
DET Upol	
Abbruchbedingungen.....	360
Allgemein/Hardware.....	354
Potentiometrische Auswertung.....	361
Startbedingungen.....	356
Titrationsparameter.....	358
Übersicht.....	353
Weitere Auswertungen.....	363
Weitere Messwerte.....	365
Dialogsprache.....	558
Division.....	31
Dosierbefehle.....	462
Dosiereinheit	
Füllen.....	62
Hahnscheibe.....	652
Konfiguration.....	652
Leeren.....	63
Parameter für Vorbereiten.....	652
Schlauchparameter.....	652
Dosieren	
Allgemein.....	60
Fixvolumen.....	64
Füllen.....	62
Leeren.....	63
Manuell dosieren.....	66
Übersicht.....	59
Vorbereiten.....	61
Dosieren der Inkremente.....	326, 342, 350, 358, 367, 370, 371, 372
Dosierer	
Anzeige.....	581, 595, 603, 611
Dosiererauswahl.....	322, 338, 348, 354, 366, 369, 371, 372, 375, 383, 388, 390, 398, 404, 463, 465, 468
Dosierervorbereitung.....	581, 595, 603, 611
Externer Dosierer.....	585
Interner Dosierer.....	585

Dosino.....	465
Drehen.....	472
Drehgeschwindigkeit.....	472
Drehposition.....	75, 623, 683
Drehrichtung.....	472
Drehwinkel.....	472
Driftkontrolle.....	417, 423, 429, 432, 438, 446, 458, 461
Driftkorrektur.....	380, 386, 389, 394, 403, 404, 410
Driftwert.....	380, 386, 389, 394, 403, 404, 410
Drucken	
Audit Trail.....	572
Bestimmungsübersicht.....	231
Common Variablen.....	672
Geräteliste.....	577
Lösungsliste.....	643
Rackliste.....	680
Report.....	232
Sensorliste.....	660

E

Eigene Kalibrierpuffer.....	554
Eingangsleitungen	
Manuelle Bedienung.....	70
SCAN-Befehl.....	499
SEND-Befehl.....	501
Vorlagen.....	555
Eingangssignal.....	499
Einheit	
Abfrage.....	510, 511
Live-Änderung.....	114
Probedaten.....	94, 113, 132
Einmass	
Abfrage.....	510, 511
Live-Änderung.....	114
Probedaten.....	94, 113, 132
Einzelbestimmung	
Abarbeiten.....	119
Ablauftest.....	106
Anzeige.....	118
Bedienungselemente.....	111
Bestimmung automatisch wiederholen.....	119
Bestimmungsablauf.....	115
Bestimmungsparameter.....	112
Datenimport.....	120
Eigenschaften.....	118
Hauptablauf.....	117
Live-Änderung.....	114
Methodenstart.....	116
Nachkonditionieren.....	117
Probedaten.....	113
Probedaten laden.....	115
Starttest.....	115
Statusanzeige.....	112
Vorkonditionieren.....	116
Elektrodennullpunkt.....	663
Elektrodentest.....	348, 354, 371, 388, 390, 398, 404, 406, 428, 430
Elektronische Unterschrift.....	535
E-Mail.....	492, 495, 516, 532
EMPTY	
Eigenschaften.....	470
Übersicht.....	469

END.....319
 Endpunkt.....376, 384, 389, 392, 400, 404, 408
 Anzeigen.....273
 Manuell setzen.....247
 EP-Anerkennung.....329, 343, 350, 361, 368, 370, 371, 372
 EP-Kriterium.....329, 333, 343, 345, 350, 351, 361, 363, 368, 370, 371, 372, 419, 425, 429, 434, 440, 449
 Ereignismeldungen.....501, 504
 ERROR.....319
 Error (Funktion).....54
 EXIT.....318
 Exitspur.....117, 127, 305, 318
 Exponentialfunktion.....41
 EXPORT
 Eigenschaften.....496
 Übersicht.....496
 Exportieren
 Audit Trail.....570
 Bestimmungen.....230
 Bestimmungsdaten.....496
 Exportvorlagen.....212
 Konfigurationsdaten.....549
 Exportvorlagen
 Auswahl.....230, 496
 Eigenschaften.....213
 Feldauswahl.....215
 Optionen.....215
 Verwalten.....212
 Externe Positionen.....599, 601, 607, 609
 Externer Dosierer.....585
 Extraktionszeit.....378, 386, 389, 394, 402, 404, 409

F

FDA.....8, 529, 533, 535
 Fehlerspur.....117, 127, 306, 319
 Filter
 Alle Statistikdatensätze.....226
 Entfernen.....226
 Filterauswahl.....218
 Filterbedingung.....224
 Letzter Filter.....223
 Schnellfilter.....223
 Speichern.....225
 Spezialfilter.....223
 Filtern
 Audit Trail.....566
 Bestimmungen.....223
 Fix-Endpunkt-Auswertung.....333, 345, 351, 363, 368, 370, 371, 372, 381, 386, 389, 394, 403, 404, 411, 419, 425, 429, 434, 440, 449
 Fixreport.....191
 Fixvolumen dosieren.....64
 FLOW
 Eigenschaften.....484
 Übersicht.....484
 Formel.....488
 Formeleingabe für Befehlsparameter.....289
 Formel-Editor
 ASCII-Tabelle.....55
 Befehlsvariablen.....19
 Bestimmungsvariablen.....24

Common Variablen.....26
 Eingabefeld.....17
 Formeleingabe für Befehlsparameter.....289
 Funktionen.....27
 Funktionsknöpfe.....17
 Methodenvariablen.....18
 Operatoren.....27
 Resultatvariablen.....24
 Systemvariablen.....25
 Übersicht.....16
 Variablen.....18
 Formularreport.....171, 178
 Füllen.....62
 Funktionen
 Absolutwert.....42
 Audit Trail.....564
 Bestimmungsübersicht.....220
 Case.....53
 Datenbank.....157
 Dekadischer Logarithmus.....41
 Error.....54
 Exponentialfunktion.....41
 Konfiguration.....524
 Nachkommateil.....43
 Natürlicher Logarithmus.....41
 NumberToText.....47
 NumberToTime.....47
 Quadratwurzel.....42
 SubText.....51
 TextPosition.....51
 TextToNumber.....47
 TextToTime.....48
 Time().....45
 Time(Datum).....45
 Time(Datum+Zeit).....46
 TimeToNumber.....49
 TimeToText.....49
 Trim.....52
 Übersicht.....27
 Vorkommateil.....43
 Vorkommateil runden.....43
 Vorzeichen.....44

G

Gas.....484, 625
 Gasfluss.....484
 Generatorelektrode.....406
 Generatorstrom.....406
 Geräte
 712 Konduktometer.....590
 730 Sample Changer.....613
 756/831 Coulometer.....587
 774 Oven Sample Processor.....619
 778/789 Sample Processor.....605
 814/815 USB Sample Processor.....597
 846 Dosing Interface.....593
 Allgemeine Eigenschaften.....579, 583, 588, 591, 594, 598, 605, 614, 619, 628, 632, 635
 Allgemeines.....574
 Barcodeleser.....631
 Dosierer.....617, 624
 Eigenschaften bearbeiten.....578
 Einbindung.....2
 Einstellungen.....633
 Exportieren.....549
 Externer Dosierer.....585

Gas.....625
 Geräteauswahl.....322, 338, 348, 354, 366, 369,
 371, 372, 375, 383, 388, 390, 398, 404, 415,
 421, 428, 430, 436, 442, 445, 447, 456, 463,
 472, 474, 476, 477, 479, 481, 482, 497, 506,
 577
 Geräteinformationen.....260
 Geräteliste drucken.....577
 Gerätetabelle.....574
 GLP-Test.....582, 586, 589, 592, 596, 604, 612,
 618, 626, 630, 634, 638
 Importieren.....550
 Interner Dosierer.....585
 Löschen.....577
 Manuelle Bedienung.....58
 Messeingänge.....580
 MSB.....581, 595, 603, 611
 Neue Programmversion laden.....579, 584, 588,
 591, 594, 598, 606, 614, 620
 Neues Gerät hinzufügen.....577
 Ofen.....624
 Peripheriegeräte.....574
 Rack.....601, 610, 616, 621
 Reservieren.....116, 127
 RS232.....574, 586, 589, 592, 612, 617, 626, 636
 RS232 Waage.....629
 RS232-Gerät.....635
 Spaltenanzeige.....576
 Status.....574
 Titrando.....578
 Titrino.....583
 Turm.....599, 607, 621
 Unterfenster.....574
 USB-Geräte.....574
 Waage.....627
 Zuordnung.....117, 128
 Gerätenamen.....574
 Gerätetyp.....574
 Glättungsfaktor.....333, 345, 351, 363, 368, 370, 371,
 372, 419, 425, 429, 434, 440, 449
 Gleich.....35
 GLP-Test
 Geräte.....582, 586, 589, 592, 596, 604, 612, 618,
 626, 630, 634, 638
 Lösungen.....655
 Grösser als.....36
 Grösser gleich.....37

H

Halbneutralisationspotential.....333, 345, 351, 363,
 368, 370, 371, 372, 412
 Hauptspur.....303
 HEATER
 Eigenschaften.....482
 Übersicht.....482
 Heizung.....482
 Hilfe.....6
 Hilfslinien.....247
 History
 Bestimmungen.....234
 Common Variablen.....675
 Sensoren.....666
 Titer.....647
 Hold-Taste.....111, 122

I

Importieren
 Bestimmungen.....230
 Konfigurationsdaten.....550
 Indikatorelektrode.....406
 Informationen
 Bestimmung.....256
 Kommentar.....263
 Konfiguration.....260
 Meldungen.....262
 Methode.....258
 Probe.....259
 Übersicht.....255
 Initialmesswert.....324, 340, 350, 356, 366, 369, 371,
 372, 375, 383, 388, 390, 400, 404
 Inkrement.....326, 342, 350, 358, 367, 370, 371, 372
 Interner Dosierer.....585

K

Kalibrieren
 Anzahl Puffer.....454
 Automatischer Lösungswechsel.....453
 Kalibrierbefehle.....451
 Manueller Lösungswechsel.....452
 Kalibrierkurve
 Anzeigen.....234
 Report.....199
 Kalibrierpuffer.....554
 Kalibrierung
 Eingreifgrenzen.....667
 History.....666
 History-Grenzwerte.....667
 Kalibrierdaten.....663
 Überwachung.....663
 Warngrenzen.....667
 KFC
 Abbruchbedingungen.....410
 Allgemein/Hardware.....406
 Konditionieren.....410
 Regelparameter.....408
 Startbedingungen.....407
 Titrationsparameter.....409
 Übersicht.....405
 Weitere Auswertungen.....411
 Weitere Messwerte.....412
 KFT
 KFT Ipol.....397
 KFT Upol.....403
 Übersicht.....396
 KFT Ipol
 Abbruchbedingungen.....402
 Allgemein/Hardware.....398
 Konditionieren.....403
 Regelparameter.....400
 Startbedingungen.....400
 Titrationsparameter.....402
 Übersicht.....397
 Weitere Auswertungen.....403
 Weitere Messwerte.....403
 KFT Upol
 Abbruchbedingungen.....404
 Allgemein/Hardware.....404
 Konditionieren.....404
 Regelparameter.....404

Startbedingungen.....404
 Titrationsparameter.....404
 Übersicht.....403
 Weitere Auswertungen.....404
 Weitere Messwerte.....404
 Kleiner als.....38
 Kleiner gleich.....39
 Knickpunkt-Auswertung.....333, 345, 351, 363, 368,
 370, 371, 372, 413, 419, 425, 429, 434, 440, 449
 Kommunikation.....4
 Kommunikationsbefehle.....497
 Konditionieren.....380, 386, 389, 394, 403, 404, 410
 Automatisches Konditionieren.....312
 Bestimmungsserie.....127, 128
 Einzelbestimmung.....116, 117
 Konfiguration
 Allgemeines.....521
 Ansicht.....525
 Automatisch sichern.....551
 Exportieren.....549
 Funktionen.....524
 Informationen zur Bestimmung.....260
 Konfigurationsdatenbank.....521
 Konfigurationssymbol.....521
 Manuell sichern.....552
 Menüleiste.....522
 Oberfläche.....521
 Optionen.....558
 Symbolleiste.....523
 Unterfenster.....524
 Wiederherstellen.....552
 Konformität.....4
 Kontrollkarte
 Anzeigen.....235
 Eigenschaften.....203
 Grafikparameter.....204
 Grenzwerte.....205
 Kommentar.....206
 Statistik.....205
 Vorlagen verwalten.....203
 Kurven
 Allgemeines.....268
 Auswertungslinien anzeigen.....273
 Eigenschaften.....269
 Endpunkte anzeigen.....273
 Gitter.....273
 Glättung.....271, 272
 Hintergrund.....273
 Kurvenüberlagerungseigenschaften.....207
 Kurvenüberlagerungsoptionen.....210
 Messpunktliste.....268, 275
 Nachbearbeiten.....247
 Optionen.....273
 Skalierung.....270, 271, 272
 Überlagern.....237
 Vorlagen für Kurvenüberlagerung.....207
 x-Achse.....270
 y1-Achse.....271
 y2-Achse.....272
 Kurven überlagern
 Anzeige.....237
 Eigenschaften.....207
 Kommentar.....211
 Optionen.....210
 Vorlagen verwalten.....207
 x-Achse.....208
 y-Achse.....209

Kurvenanzeige.....146
 Kurvenauswertung
 Bearbeiten.....247
 Eigenschaften.....249
 Glättung.....251
 Nachbearbeiten.....246
 Optionen.....252
 x-Achse.....250
 y-Achse.....251
 Kurvenfeld
 Gitter.....198
 Glättung.....195, 197
 Optionen.....198
 Skalierung.....194, 195, 197
 x-Achse.....194
 y1-Achse.....195
 y2-Achse.....197

L

Layout ändern.....87, 158, 526
 Leeren.....63
 Letzter Filter
 Audit Trail.....567
 Bestimmungen.....223
 LIFT
 Eigenschaften.....476
 Übersicht.....475
 Liftgeschwindigkeit.....476, 599, 607
 Liftposition.....75, 476
 Liftweg.....599, 607, 615, 621
 Live-Änderungen
 Einzelbestimmung.....114
 Methodenfenster.....143
 Liveanzeige
 Allgemeines.....145
 Applikationsnotiz.....146
 Eigenschaften.....146
 Kurvenanzeige.....146
 Messwertanzeige.....146
 Spuren.....145, 312
 Lizenzen
 Anzeigen.....548
 Hinzufügen.....548
 Lizenzcode.....548
 Logarithmus.....41
 LOOP
 Eigenschaften.....515
 Übersicht.....514
 Lösungen
 Allgemeines.....640
 Dosiereinheit.....652
 Eigenschaften bearbeiten.....643
 Exportieren.....549
 GLP-Test.....655
 Importieren.....550
 Konzentration.....644
 Löschen.....643
 Lösungsauswahl.....322, 338, 348, 354, 366, 369,
 371, 372, 375, 383, 388, 390, 398, 404, 463,
 465
 Lösungsliste drucken.....643
 Lösungstabelle.....640
 Neue Lösung hinzufügen.....642
 Parameter.....644
 Spaltenanzeige.....642

- Titer.....645
 - Titer-History.....647
 - Überwachung.....644
 - Unterfenster.....640
 - Wechseleinheit.....649
 - LQH
 - Allgemein/Hardware.....465
 - Parameter.....466
 - Übersicht.....465
-
- M**
- Manuelle Bedienung
 - Allgemeines.....58
 - Bewegen.....73
 - Dosieren.....59
 - Funktionen.....59
 - Geräteauswahl.....58
 - Grafikanzeige.....59
 - Heizung/Gas.....78
 - Öffnen.....58
 - Position zuweisen.....75
 - Probenwechslerfunktionen.....71
 - Pumpen.....77
 - Übersicht.....67
 - Unterfenster.....58
 - Maximum-Auswertung.....333, 345, 351, 363, 368, 370, 371, 372, 381, 386, 389, 394, 403, 404, 413, 419, 425, 429, 434, 440, 443, 449
 - MEAS
 - MEAS Conc.....444
 - MEAS Cond.....446
 - MEAS Ipol.....427
 - MEAS pH.....414
 - MEAS T.....436
 - MEAS T/Flow.....442
 - MEAS U.....421
 - MEAS Upol.....430
 - Übersicht.....414
 - MEAS Conc
 - Allgemein/Hardware.....445
 - Messparameter.....446
 - Übersicht.....444
 - Weitere Messwerte.....446
 - MEAS Cond
 - Allgemein/Hardware.....447
 - Auswertungen.....449
 - Messparameter.....448
 - Übersicht.....446
 - Weitere Messwerte.....451
 - MEAS Ipol
 - Allgemein/Hardware.....428
 - Auswertungen.....429
 - Messparameter.....429
 - Übersicht.....427
 - Weitere Messwerte.....429
 - MEAS pH
 - Allgemein/Hardware.....415
 - Auswertungen.....419
 - Messparameter.....417
 - Übersicht.....414
 - Weitere Messwerte.....421
 - MEAS T
 - Allgemein/Hardware.....436
 - Auswertungen.....440
 - Messparameter.....438
 - Übersicht.....436
 - Weitere Messwerte.....442
 - MEAS T/Flow
 - Allgemein/Hardware.....442
 - Evaluations.....443
 - Messparameter.....443
 - Übersicht.....442
 - Weitere Messwerte.....444
 - MEAS U
 - Allgemein/Hardware.....421
 - Auswertungen.....425
 - Messparameter.....423
 - Übersicht.....421
 - Weitere Messwerte.....427
 - MEAS Upol
 - Allgemein/Hardware.....430
 - Auswertungen.....434
 - Messparameter.....432
 - Übersicht.....430
 - Weitere Messwerte.....435
 - Meldungen.....262, 516
 - Menüleiste
 - Arbeitsplatz.....81
 - Audit Trail.....561
 - Datenbank.....152
 - Konfiguration.....522
 - Methoden.....278
 - Reportvorlage.....173
 - Messbefehle.....414
 - Messdauer.....443, 448
 - Messeingang.....322, 338, 348, 354, 366, 369, 371, 372, 375, 383, 388, 390, 398, 404, 415, 421, 428, 430, 436, 445, 580
 - Messfrequenz.....448
 - Messintervall.....417, 423, 429, 432, 438, 443, 446, 448, 458
 - Messparameter.....417, 423, 429, 432, 438, 446
 - Messpunktdichte.....326, 342, 350, 358, 367, 370, 371, 372
 - Messpunktliste.....268
 - Messtemperatur.....448
 - Messwert anzeigen.....380, 386, 389, 394, 403, 404, 410
 - Messwertanzeige.....146
 - Messwertdrift.....324, 326, 340, 342, 350, 356, 358, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 375, 383, 388, 390, 400, 404, 417, 423, 429, 432, 438, 446, 458, 461
 - Messwertübernahme.....326, 342, 350, 358, 367, 370, 371, 372
 - MET
 - MET Ipol.....370
 - MET pH.....365
 - MET U.....369
 - MET Upol.....371
 - Übersicht.....365
 - MET Ipol
 - Abbruchbedingungen.....371
 - Allgemein/Hardware.....371
 - Potentiometrische Auswertung.....371
 - Startbedingungen.....371
 - Titrationsparameter.....371
 - Übersicht.....370
 - Weitere Auswertungen.....371
 - Weitere Messwerte.....371
 - MET pH
 - Abbruchbedingungen.....368

- Allgemein/Hardware.....366
 - Potentiometrische Auswertung.....368
 - Startbedingungen.....366
 - Titrationparameter.....367
 - Übersicht.....365
 - Weitere Auswertungen.....368
 - Weitere Messwerte.....369
 - MET U
 - Abbruchbedingungen.....370
 - Allgemein/Hardware.....369
 - Potentiometrische Auswertung.....370
 - Startbedingungen.....369
 - Titrationparameter.....370
 - Übersicht.....369
 - Weitere Auswertungen.....370
 - Weitere Messwerte.....370
 - MET Upol
 - Abbruchbedingungen.....372
 - Allgemein/Hardware.....372
 - Potentiometrische Auswertung.....372
 - Startbedingungen.....372
 - Titrationparameter.....372
 - Übersicht.....371
 - Weitere Auswertungen.....372
 - Weitere Messwerte.....372
 - Methode
 - Aktuell machen.....300
 - Allgemeines.....277
 - Änderungsbegründung.....292
 - Änderungskommentar.....292, 533
 - Anzeigen.....284
 - Aufbau.....277
 - Auswahl.....284
 - Befehle.....309
 - Bestimmungsmethode anzeigen.....233
 - Definition.....277
 - Export.....295
 - Funktionen.....281
 - History anzeigen.....300
 - Importieren.....296
 - Informationen zur Bestimmungsmethode.....258
 - Kopieren.....295
 - Löschen.....295
 - Menüleiste.....278
 - Methodengruppen.....301
 - Methodenstart.....116, 127
 - Methodensymbol.....277, 284
 - Methodenvorlage.....282
 - Methodenwahl.....115, 126
 - Methodenwahl mit Zuordnungs-ID.....119
 - Nachbearbeiten.....243
 - Neu erstellen.....282
 - Oberfläche.....277
 - Öffnen.....282
 - Probedaten.....94, 113, 132
 - Reports.....519
 - Schliessen.....292
 - Speichern.....290
 - Status.....258
 - Symbolleiste.....280
 - Test.....290
 - Umbenennen.....294
 - Unterfenster auf Arbeitsplatz.....143
 - Unterschrift 1.....297
 - Unterschrift 2.....298
 - Unterschrift 2 löschen.....299
 - Unterschriften.....258
 - Unterschriften anzeigen.....299
 - Unterschriftsberechtigungen.....540
 - Variablen.....18
 - Verschieben.....295
 - Version.....258, 290, 300
 - Verwalten.....293
 - Zoom.....285
 - Methode (Unterfenster auf Arbeitsplatz)
 - Befehle abbrechen.....144
 - Live-Änderungen.....143
 - Übersicht.....143
 - Zoom.....143
 - Methode (Unterfenster auf Arbeitsplatz).....143
 - Methodeneditor.....3
 - Methodengruppen
 - Allgemeine Parameter.....302
 - Eigenschaften.....301
 - Standard-Methodengruppe.....541
 - Verwalten.....301
 - Zugriffsrechte.....302
 - Methodenreports.....519, 520
 - Methodenvariablen
 - Auswahl in Formel-Editor.....18
 - Deklaration.....314, 315
 - Typ.....315
 - Überwachung.....315
 - Wert.....315
 - Zuordnung.....315
 - Minimum-Auswertung.....333, 345, 351, 363, 368, 370, 371, 372, 381, 386, 389, 394, 403, 404, 413, 419, 425, 429, 434, 440, 443, 449
 - MOVE
 - Automatischer Lösungswechsel.....453
 - Eigenschaften.....472
 - Übersicht.....471
 - MSB.....581, 595, 603, 611
 - Multiplikation.....30
-
- ## N
- Nachbearbeiten
 - Allgemeines.....239
 - Änderungen.....242
 - Eigenschaften Kurvenauswertung.....249
 - Endpunkte manuell setzen.....247
 - Funktionen.....239
 - Kurvenauswertung.....246, 247
 - Methode.....243
 - Nachbearbeitungsfenster.....239
 - Nachrechnen.....239
 - Regeln.....240
 - Resultatanzeige.....253
 - Statistik.....244
 - Unterfenster.....239
 - Variablen.....242
 - Zurücksetzen.....239
 - Nachkommateil.....43
 - Nachrechnen.....239
 - Natürlicher Logarithmus.....41
 - Navigation
 - Audit Trail.....563
 - Bestimmungsübersicht.....219
 - Reportvorlage.....181
 - Normalspur.....304, 317
 - Notstopp.....558
 - NumberToText.....47

NumberToTime.....47

O

Ofen.....624

Online-Hilfe.....6

Operatoren

Addition.....28

AND.....33

Division.....31

Gleich.....35

Grösser als.....36

Grösser gleich.....37

Kleiner als.....38

Kleiner gleich.....39

Multiplikation.....30

OR.....34

Potenzierung.....32

Subtraktion.....29

Übersicht.....27

Ungleich.....40

Optionen

Dialogsprache.....558

Konfiguration.....558

Notstopp.....558

Speichern.....559

OR.....34

P

Passwort

Allgemeines.....8

Ändern.....10

Eingabe.....9

Sicherheitseinstellungen.....529

Startpasswort.....10, 543

Passwortschutz.....8, 529

Pause.....324, 340, 350, 356, 366, 369, 371, 372, 375, 383, 388, 390, 400, 404, 407

Pause-Taste.....122

PDF-Ausgabe.....559

Peripheriegeräte.....574, 581, 595, 603, 611

pH-Kalibrierung.....554

pK/HNP-Auswertung.....333, 345, 351, 363, 368, 370, 371, 372, 412

pK-Wert.....333, 345, 351, 363, 368, 370, 371, 372, 412

Polarisationsspannung.....354, 390, 404, 430

Polarisationsstrom.....348, 371, 388, 398, 406, 428

Port.....466

Potentiometrische Auswertung.....329, 343, 350, 361, 368, 370, 371, 372

Potenzierung.....32

PREP

Eigenschaften.....468

Übersicht.....468

Probedaten

Abfrage.....510, 511

Anzeige.....136

Arbeitsproben-tabelle.....132

Bearbeiten.....94, 132

Bestimmungsserie.....125

Einzelbestimmung.....113

Importieren.....96, 134

Informationen.....259

Live-Änderung.....114

Probentabelle.....93

Probenidentifikationen

Abfrage.....510, 511

Anordnung.....118

Informationen.....259

Live-Änderung.....114

Probedaten.....94, 113, 132

Textvorlagen.....109

Probenposition

Abfrage.....510, 511

Live-Änderung.....114

Probedaten.....94, 113, 132

Probentabelle

Abarbeiten.....100

Anzeige.....98

Bearbeiten.....93, 99

Bearbeiten sperren.....99

Datenimport.....101

Drucken.....97

Eigenschaften.....98

Exportieren.....104

Importieren.....105

Kommentar.....103

Kopieren.....104

Löschen.....104

Neu erstellen.....92

Öffnen.....92

Speichern.....96

Umbenennen.....104

Verwalten.....103

Probennummer.....112, 123

Probenwechslerfunktionen

Allgemein.....72

Bewegen.....73

Heizung/Gas.....78

Position zuweisen.....75

Pumpen.....77

Probenzuordnung.....106, 107

Probenzuordnungsabfrage.....108

Probenzuordnungstabelle.....106, 107

Programmadministration

Allgemeines.....546

Lizenzen.....548

Rechnerkennungen.....548

Sicherungsverzeichnisse.....546

Programmteile

Arbeitsplatz.....81

Datenbank.....151

Konfiguration.....521

Methoden.....277

Übersicht.....7

Programmversionen.....5

Pufferdaten

Exportieren.....549

Importieren.....550

Puffertyp.....454

Puls-länge.....556

PUMP

Eigenschaften.....477

Übersicht.....477

Pumpe.....477

Pumpen.....615

Q

Quadratwurzel.....42

R

RACK

Eigenschaften.....481
Übersicht.....480

Rack initialisieren.....480

Rackcode.....622, 678, 679, 681

Rackdaten

Allgemeines.....678
Aufgesetztes Rack.....601, 610, 616, 621
Eigenschaften bearbeiten.....681
Eigenschaften für 774.....622
Exportieren.....549
Importieren.....550
Konfiguration.....678
Liftpositionen.....683
Liftpositionen (774).....623
Neues Rack hinzufügen.....679
Rack löschen.....680
Rackliste drucken.....680
Rackparameter.....682
Racktabelle.....678
Spezialbecher.....684
Spezialbecher (774).....623
Spezialbecher bearbeiten.....685
Standard-Racks.....678
Unterfenster.....678

Rackoffset.....682

Racktest.....481

RECEIVE

Eigenschaften.....503
Ereignis/Status.....504
Übersicht.....503

Rechnerkennungen.....548

Referenztemperatur.....448

Regelbereich.....376, 384, 389, 392, 400, 404, 408

Regelparameter.....376, 384, 389, 392, 400, 404, 408

Reguläre Ausdrücke.....507

Remotebox.....70, 499, 581, 595, 603, 611

Repeat-Schleife.....514

REPORT

Eigenschaften.....495
Übersicht.....495

Report (Unterfenster auf Arbeitsplatz)

Aktueller Report.....149
Allgemeines.....149
Ausgewählter Report.....149
Reportübersicht.....149

Report (Unterfenster auf Arbeitsplatz).....149

Reports

Aktueller Report.....149
Anzeige auf Arbeitsplatz.....149
Ausgewählter Report.....149
Drucken.....232
Reportübersicht.....149

Reportvorlagen

Allgemeines.....172
Anzahl Seiten.....190
Auswahl.....495
Bausteine bearbeiten.....180
Bausteine einfügen.....179

Bausteinleiste.....176
Bereiche definieren.....178
Bild.....191
Datenfeld.....185
Datumsfeld.....187
Exportieren.....202, 549
Fixreport.....191
Formularreport.....171, 178
Funktionen.....177
Gitter.....183
Importieren.....202, 550
Kalibrierkurvenfeld.....199
Kommentar.....182
Kopieren.....202
Kurvenfeld.....193, 194, 195, 197, 198
Linie.....192
Löschen.....202
Masseinheit.....183
Menüleiste.....173
Navigieren.....179
Neu erstellen.....171
Oberfläche Editor.....173
Öffnen.....171
Optionen.....183
Papierformat.....177
Rechteck.....193
Seite einrichten.....177
Seiten einfügen.....179
Seitenansicht.....181
Seitenränder.....177
Seitenzahl.....189
Speichern.....183
Standardschrift.....183
Symbolleiste.....175, 176
Tabellarischer Report.....171, 178
Textfeld.....184
Umbenennen.....201
Verwalten.....201
Zeitfeld.....188
Zoom.....181

REQUEST

Abfrage der Probedaten.....511
Eigenschaften.....510
Übersicht.....509

Resultat

als Common Variable speichern.....491
als Titer speichern.....491
Beschreibung.....488
Definition.....488
Dezimalstellen.....488
Einheit.....488
Formel.....488
Name.....488
Optionen.....491
Statistik.....488
Überwachung.....489
Zuordnung.....488

Resultatbefehle.....485

Resultate

Anzeige für Berechnungsbefehl.....265
Eigenschaften.....266
Resultatübersicht.....264
Unterfenster.....264
Variablen.....24

Resultatvariablen.....24

Resultatvorlagen

Exportieren.....549
Importieren.....550

Löschen.....492
 Speichern.....493
 Umbenennen.....493
 Verwalten.....492
 RS232-Eigenschaften.....586, 589, 592, 612, 617, 626, 629
 RS232-Gerät
 Allgemeine Eigenschaften.....579, 583, 588, 591, 594, 598, 605, 614, 619, 628, 632, 635
 Eigenschaften.....635
 GLP-Test.....582, 586, 589, 592, 596, 604, 612, 618, 626, 630, 634, 638
 RS232.....636
 Verbindung testen.....637
 RS232-Geräte.....574
 Rühren
 Dauerbetrieb.....69
 Ein-/Ausschalten.....67
 Übersicht.....67
 Rührer.....322, 338, 348, 354, 366, 369, 371, 372, 375, 383, 388, 390, 398, 404, 406, 415, 421, 428, 430, 436, 445, 456, 463, 479, 581, 595, 603, 611

S

SCAN
 Eigenschaften.....499
 Übersicht.....499
 Schleife.....514
 Schnellfilter
 Audit Trail.....567
 Bestimmungsübersicht.....223
 Schnelzugriff.....522, 524
 Schnittgeradenauswertung.....247
 Schwellenwert.....333, 345, 351, 363, 368, 370, 371, 372, 381, 386, 389, 394, 403, 404, 413, 419, 425, 429, 434, 440, 443, 449
 Schwenkarm
 Befehl.....474
 Konfiguration.....600, 608
 Schwenkarmposition.....75
 Schwenken.....474
 Schwenkgeschwindigkeit.....472, 474
 Schwenkposition.....75, 599, 607
 Schwenkwinkel.....474
 SEND
 Eigenschaften.....501
 Ereignismeldungen.....501
 Übersicht.....500
 Sensoren
 Allgemeines.....657
 Eigenschaften bearbeiten.....661
 Elektrodennullpunkt.....663
 Exportieren.....549
 Grenzwerte.....665
 History.....666
 Importieren.....550
 Kalibrierdaten.....663
 Kalibrieren.....451
 Löschen.....660
 Neuen Sensor hinzufügen.....659
 Parameter.....661
 Sensorauswahl.....322, 338, 348, 354, 366, 369, 371, 372, 375, 383, 388, 390, 398, 404, 406, 415, 421, 428, 430, 436, 445, 447, 456

Sensorinformationen.....260
 Sensorliste drucken.....660
 Sensortabelle.....657
 Spaltenanzeige.....659
 Standard-Sensoren.....657
 Steilheit.....663
 Überwachung.....661, 665
 Unterfenster.....657
 Sensoren.....657
 SEQUENCE
 Eigenschaften.....518
 Übersicht.....517
 Serie
 Fortführen.....122
 Unterbrechen.....122
 Serieendspur.....305, 318
 SERIES END.....318
 SERIES START.....318
 Seriestartspur.....305, 318
 SET
 SET Ipol.....388
 SET pH.....374
 SET U.....382
 SET Upol.....389
 Übersicht.....373
 SET Ipol
 Abbruchbedingungen.....389
 Allgemein/Hardware.....388
 Konditionieren.....389
 Regelparameter.....389
 Startbedingungen.....388
 Titrationsparameter.....389
 Übersicht.....388
 Weitere Auswertungen.....389
 Weitere Messwerte.....389
 SET pH
 Abbruchbedingungen.....379
 Allgemein/Hardware.....375
 Konditionieren.....380
 Regelparameter.....376
 Startbedingungen.....375
 Titrationsparameter.....378
 Übersicht.....374
 Weitere Auswertungen.....381
 Weitere Messwerte.....382
 SET U
 Abbruchbedingungen.....386
 Allgemein/Hardware.....383
 Konditionieren.....386
 Regelparameter.....384
 Startbedingungen.....383
 Titrationsparameter.....386
 Übersicht.....382
 Weitere Auswertungen.....386
 Weitere Messwerte.....387
 SET Upol
 Abbruchbedingungen.....394
 Allgemein/Hardware.....390
 Konditionieren.....394
 Regelparameter.....392
 Startbedingungen.....390
 Titrationsparameter.....394
 Übersicht.....389
 Weitere Auswertungen.....394
 Weitere Messwerte.....395

- Sicherheitseinstellungen
 - Änderungen.....533
 - Anmeldung.....529
 - Audit Trail.....533
 - Exportieren.....549
 - Importieren.....550
 - Passwortschutz.....529
 - Standardbegründungen.....536
 - Übersicht.....529
 - Unterschriften.....535
- Sichern
 - Datenbank.....167
 - Konfigurationsdaten.....551, 552
 - Sicherungsverzeichnisse.....546
- Sicherungsverzeichnis
 - Allgemeines.....546
 - Bearbeiten.....547
 - Erstellen.....547
- SLK-Export.....213
- Sofort zurückmelden.....317
- Spaltenanzeige
 - Audit Trail.....566
 - Bestimmungsübersicht.....217
 - Common Variablen.....671
 - Lösungen.....642
 - Sensoren.....659
- Spezialbecher.....75, 623, 684, 685
- Spezialfilter
 - Audit Trail.....567
 - Bestimmungsübersicht.....223
- Spezialposition.....75, 623, 683
- Spülposition.....75, 599, 607, 623, 683
- Spuranzeige.....312
- Spurbefehle
 - END.....319
 - ERROR.....319
 - EXIT.....318
 - SERIES END.....318
 - SERIES START.....318
 - START.....311
 - TRACK.....317
- Spuren
 - Abbrechen.....501
 - Anhalten.....501, 516
 - Aufbau.....303
 - Aufruf.....512
 - Ausschneiden.....286
 - Auswählen.....286
 - Bearbeiten.....285, 307
 - Darstellung.....303
 - Darstellung im Ablauf.....143
 - Definition.....303
 - Einfügen.....285, 287
 - Exitspur.....305, 318
 - Fehlerspur.....306, 319
 - Fortführen.....501
 - Hauptspur.....303
 - Kopieren.....286
 - Liveanzeige.....145
 - Löschen.....287
 - Normalspur.....304, 317
 - Serieendspur.....305, 318
 - Seriestartspur.....305, 318
 - Spurbefehle.....311
 - Verschieben.....286
- Standardbegründungen.....536
- Standards.....459
- START
 - Allgemein.....312
 - Applikationsnotiz.....313
 - Methodenvariablen Detailfenster.....315
 - Methodenvariablen Tabelle.....314
 - Übersicht.....311
- Startbedingungen.....324, 340, 350, 356, 366, 369, 371, 372, 375, 383, 388, 390, 400, 404, 407
- Startdrift.....380, 386, 389, 394, 403, 404, 410
- Startmesswert.....324, 340, 350, 356, 366, 369, 371, 372
- Startpasswort
 - Eingeben.....10
 - Setzen.....543, 545
- Startsteigung.....324, 340, 350, 356, 366, 369, 371, 372
- Start-Taste.....111, 122
- Starttest.....115, 126
- Startvolumen.....324, 340, 350, 356, 366, 369, 371, 372, 375, 383, 388, 390, 400, 404
- Statistik
 - Alle Statistikdatensätze anzeigen.....226
 - Ein-/Ausschalten auf Arbeitsplatz.....112, 123
 - Ein-/Ausschalten in Methode.....312
 - Nachbearbeiten.....244
 - Resultatanzeige.....264, 265
- Status.....504
- Statusanzeige
 - Bestimmungsserie.....123
 - BUSY.....111, 112, 117, 122, 123, 127
 - COND BUSY.....111, 112, 116, 117, 122, 123, 127, 128
 - COND HOLD.....111, 112, 122, 123
 - COND READY.....111, 112, 116, 117, 122, 123, 127, 128
 - Einzelbestimmung.....112
 - ERROR.....112, 123
 - HOLD.....111, 112, 122, 123
 - PAUSE.....123
 - READY.....111, 112, 117, 122, 123, 127
- Steilheit.....663
- STIR
 - Eigenschaften.....479
 - Übersicht.....478
- Stopp EP.....328, 342, 350, 360, 368, 370, 371, 372
- Stopppdrift.....376, 384, 389, 392, 400, 404, 408
- Stoppkriterium.....376, 384, 389, 392, 400, 404, 408
- Stoppmesswert.....328, 342, 350, 360, 368, 370, 371, 372, 417, 423, 429, 432, 438, 443, 446, 448
- Stoppvolumen.....328, 342, 350, 360, 368, 370, 371, 372, 379, 380, 386, 389, 394, 402, 403, 404
- Stoppszeit.....328, 342, 350, 360, 368, 370, 371, 372, 376, 379, 380, 384, 386, 389, 392, 394, 400, 402, 403, 404, 410
- Stop-Taste.....111, 122
- SubText.....51
- Subtraktion.....29
- Suchen.....221
- SWING
 - Eigenschaften.....474
 - Overview.....474

Swing Head
 Parameter.....599, 607
 Schwenkarm-Konfiguration.....600, 608
 Swing Head 759.....615
 Symbolleiste
 Arbeitsplatz.....84
 Audit Trail.....563
 Datenbank.....155
 Ein-/Ausschalten.....522
 Konfiguration.....523
 Methoden.....280
 Reportvorlage.....175
 Systemvariablen.....25

T

Tabellarischer Report.....171, 178
 Tangentenauswertung.....247
 Temperaturmessung.....322, 338, 348, 354, 366, 369,
 371, 372, 375, 383, 388, 390, 398, 404, 415, 421,
 428, 430, 445
 Temperatursensor.....580
 Texteditor.....56
 TextPosition.....51
 TextToNumber.....47
 TextToTime.....48
 Textvorlagen.....109
 Time().....45
 Time(Datum).....45
 Time(Datum+Zeit).....46
 TimeToNumber.....49
 TimeToText.....49
 Titer
 Anzeige.....640
 Berechnung in CALC-Befehl.....491
 Eingreifgrenzen.....648
 History.....647
 History-Grenzwerte.....648
 Statistik.....645
 Titerbestimmung.....645
 Überwachung.....645
 Warngrenzen.....648
 Titrande
 Allgemeine Eigenschaften.....579, 583, 588, 591,
 594, 598, 605, 614, 619, 628, 632, 635
 Eigenschaften.....578
 GLP-Test.....582, 586, 589, 592, 596, 604, 612,
 618, 626, 630, 634, 638
 Messeingänge.....580
 MSB.....581, 595, 603, 611
 Titrationsbefehle.....320
 Titrationsgeschwindigkeit.....326, 342, 350, 358, 367,
 370, 371, 372, 376, 384, 389, 392, 400, 404
 Titrationsparameter.....326, 342, 350, 358, 367, 370,
 371, 372, 378, 386, 389, 394, 402, 404, 409
 Titrationsrichtung.....378, 386, 389, 394, 402, 404
 Titrimo
 Allgemeine Eigenschaften.....579, 583, 588, 591,
 594, 598, 605, 614, 619, 628, 632, 635
 Eigenschaften.....583
 Externer Dosierer.....585
 GLP-Test.....582, 586, 589, 592, 596, 604, 612,
 618, 626, 630, 634, 638

Interner Dosierer.....585
 RS232.....586, 589, 592, 612, 617, 626
 TRACK.....317
 TRANSFER
 Eigenschaften.....506
 Reguläre Ausdrücke.....507
 Transferanweisungen.....507
 Übersicht.....505
 Transferanweisungen.....506, 507
 Trim.....52
 Turm
 Externe Positionen.....599, 601, 607, 609
 Liftpositionen.....683
 Liftpositionen (774).....623
 Swing Head.....599, 607
 Turmparameter.....599, 607, 621

U

Überwachung
 Audit Trail.....573
 Common Variablen.....673
 Datenbank.....168
 GLP.....582, 586, 589, 592, 596, 604, 612, 618,
 626, 630, 634, 638
 Kalibrierdaten.....663
 Lösung.....644
 Sensor.....661
 Titer.....645
 Ungleich.....40
 Unterfenster
 Arbeitsplatz.....84
 Darstellung.....524
 Datenbank.....156
 Konfiguration.....524
 Schnelzugriff.....524
 Unterschreiben
 Ablauf.....11
 Begründung.....297, 298
 Kommentar.....297, 298
 Regeln.....11
 Sicherheitseinstellungen.....535
 Unterschrift 1.....12, 227, 297
 Unterschrift 2.....13, 228, 298
 Unterschriften 2 löschen.....14, 229, 299
 Unterschriften anzeigen.....229, 299
 Unterschriftsberechtigungen.....540
 USB-Geräte.....574
 UTC.....45, 46

V

Variablen
 Befehlsvariablen.....19
 Bestimmungsvariablen.....24
 Common Variablen.....26
 Eingabe.....18
 Methodenvariablen.....18
 Resultatvariablen.....24
 Systemvariablen.....25
 Übersicht.....18
 Verbindungstest
 Barcodeleser.....633
 RS232-Gerät.....637
 Waage.....629

Verschiedene Befehle.....509
Versionen.....5
Volumen nach EP.....328, 342, 350, 360, 368, 370,
371, 372
Vorkommateil.....43
Vorkommateil runden.....43
Vorlagen
Ausgangsleitungen.....556
Eigene Kalibrierpuffer.....554
Eingangsleitungen.....555
Vorzeichen.....44

W

Waage
Allgemeine Eigenschaften.....579, 583, 588, 591,
594, 598, 605, 614, 619, 628, 632, 635
Datenimport.....101, 120, 140
Eigenschaften.....627
GLP-Test.....582, 586, 589, 592, 596, 604, 612,
618, 626, 630, 634, 638
RS232.....629
Verbindung testen.....629
WAIT
Eigenschaften.....516
Übersicht.....516
Warten.....516
Wartezeit nach 'Cond ok'.....380, 386, 389, 394, 403,
404, 410

Wechseleinheit
Füllen.....62
Konfiguration.....649
Parameter für Vorbereiten.....649
Schlauchparameter.....649
Wechseleinheiten.....640
Weitere Auswertungen.....333, 345, 351, 363, 368,
370, 371, 372, 381, 386, 389, 394, 403, 404, 411
Weitere Messwerte.....335, 347, 353, 365, 369, 370,
371, 372, 382, 387, 389, 395, 403, 404, 412, 421,
427, 429, 435, 442, 444, 446, 451
While-Schleife.....514
Wiederherstellen
Datenbank.....169
Konfigurationsdaten.....552
Willkommen.....1

X

XML-Export.....213

Z

Zeitintervall Messpunkt.....378, 386, 389, 394, 402,
404, 409
Zieltemperatur.....482
Zugriffsrechte
Anwendergruppen.....539
Datenbank.....167
Zuordnungs-ID.....100, 107, 119, 139