



Application Note AN-NIR-150

Monitoring the production of stearic acid and its salts with NIR spectroscopy

Acid number, iodine value, granulometry, moisture, and more

Stearic acid and its derivatives (e.g., magnesium, calcium, and zinc stearates) are widely used in the lubricants, pharmaceutical, cosmetics, plastics, and food industries. Producing these materials involves several steps: clarification, hydrogenation, cleavage, and distillation, followed by converting stearic acid into its respective stearates. This Application Note demonstrates how the OMNIS NIR Analyzer can be

used to monitor the stearic acid iodine value, acid value, moisture, ash content, melting point, and granulometry during the production process and in the final product. Near-infrared (NIR) spectroscopy is a rapid, nondestructive analytical technique that is fast becoming a preferred method over other slower, more costly alternatives.

EXPERIMENTAL EQUIPMENT

Quality control during stearic acid production is essential to guarantee consistency and compliance with industry standards. Each stage of the process,

Pre-entry (raw material):

Acid number/iodine value – 44/40 samples

Hydrogenation:

Acid number – 17 samples

Cleavage:

Acid number – 99 samples

Mg, Ca, and Zn stearates:

Ash, granulometry, melting point, and moisture – 69 samples

During stearic acid production, samples occur in two forms depending on the process stage. Early steps involve liquid samples (a viscous mixture of saturated fatty acids and/or animal fat). After purification, the product solidifies into flakes, powder, or pellets, representing the final stearic acids and their salts. Since quality control is required at different stages of production, both liquid and solid sample types can be measured with the OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid (Figure 1). This allows an easy transition from monitoring intermediate products to performing quality control of final stearic acids.

The OMNIS Software (Table 1) was used for all data acquisition, and prediction model development was

from initial raw material preparation to the final conversion into stearates, requires analytical checks. The samples used in this study include:



Figure 1. OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid.

done with the help of the OMD (OMNIS Model Developer).

Liquid samples (pre-entry, hydrogenation, cleavage):

- Each sample was measured in transmission mode using an 8 mm disposable vial.
- Spectra were collected at 75 °C using the vessel temperature control mode.

Solid samples (Mg, Ca, and Zn stearates):

- Each sample was measured by reflectance mode in a 28 mm disposable vial.

Table 1. Hardware and software equipment overview.

Equipment	Article Number
OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid	2.1072.0010
Disposable vials, 28 mm, reflection	6.7402.140
Flexible holder OMNIS NIR	6.07402.300
Disposable vial, 8 mm, transmission	6.7402.240
Holder OMNIS NIR, vial, 8 mm	6.07401.070
OMNIS Stand-Alone license	6.06003.010
Software license Quant Development	6.06008.002

RESULT

NIR spectroscopy was successfully applied to monitor both process samples and final stearate products. **Figure 2** shows NIR spectra collected from cleavage samples, illustrating the spectral information used for model development. Quantitative models were developed for stearic acid's acid value, iodine value, moisture, ash content, melting point, and granulometry. The reference values used were obtained using the routine quality control methods employed during stearic acid and stearate production. **Figures 3–9** present the correlation plots and

corresponding figures of merit (FOMs) for each parameter. The data points along the regression line indicate good correlation between the NIR model and the reference method. The FOMs provide additional information about model performance, including calibration accuracy and robustness.

Overall, the developed models demonstrated good correlation with the laboratory reference values, indicating that the selected NIR spectral range contains sufficient information for reliable quality control throughout the production process.

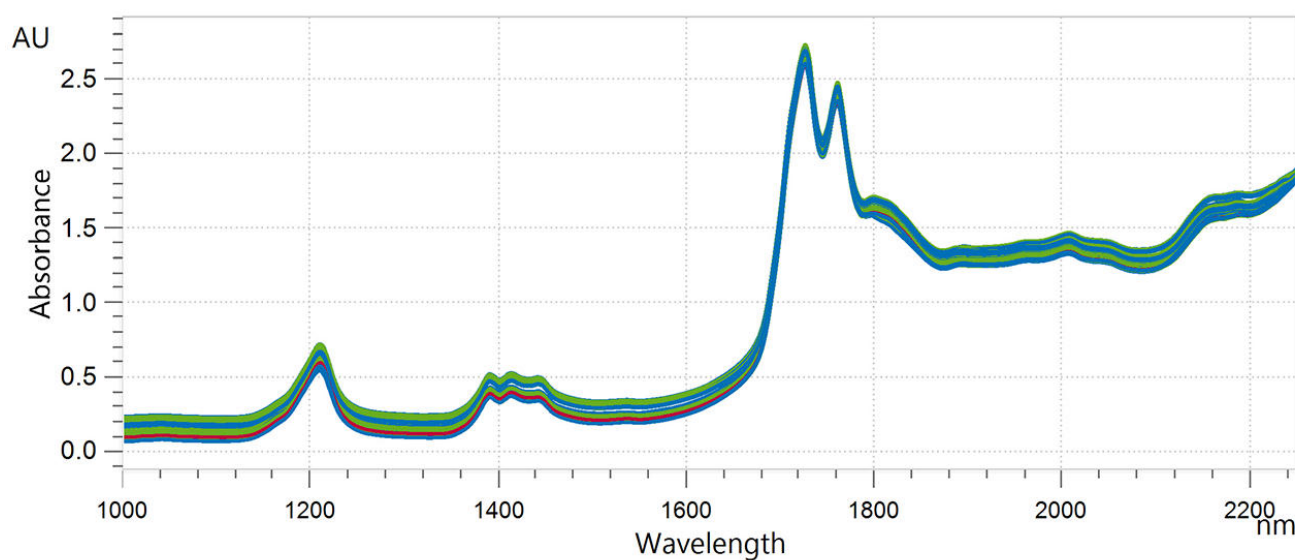


Figure 2. NIR spectra of the stearate cleavage samples collected by transmission mode in an 8 mm vial at 75 °C. These spectra were collected with the OMNIS NIR Analyzer in the liquid sample configuration.

RESULT ACID NUMBER IN PRE-ENTRY SAMPLES

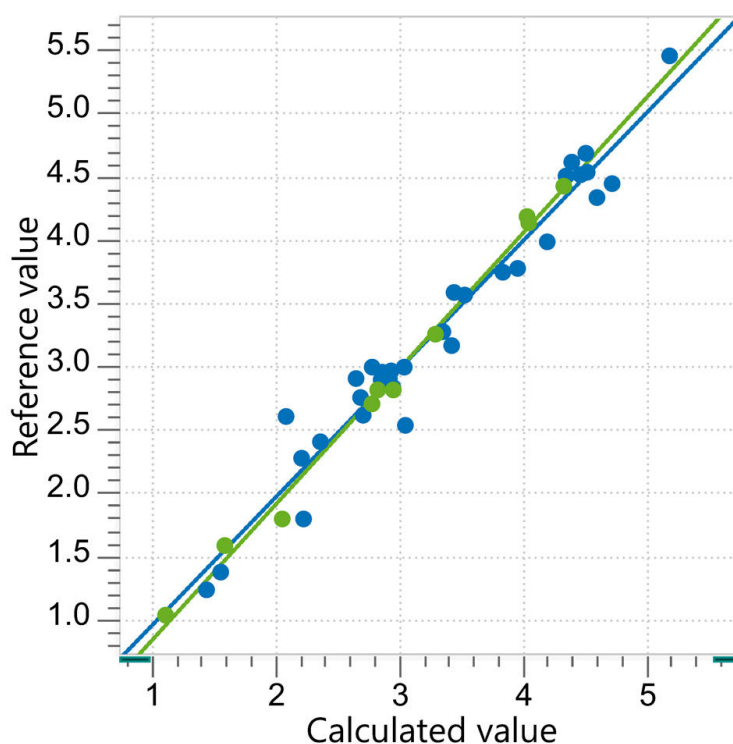


Figure 3. Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of acid number in stearate pre-entry samples with the OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid. Blue dots represent the calibration dataset, and green dots represent the validation dataset.

R^2	SEC	SECV	SEP
-------	-----	------	-----

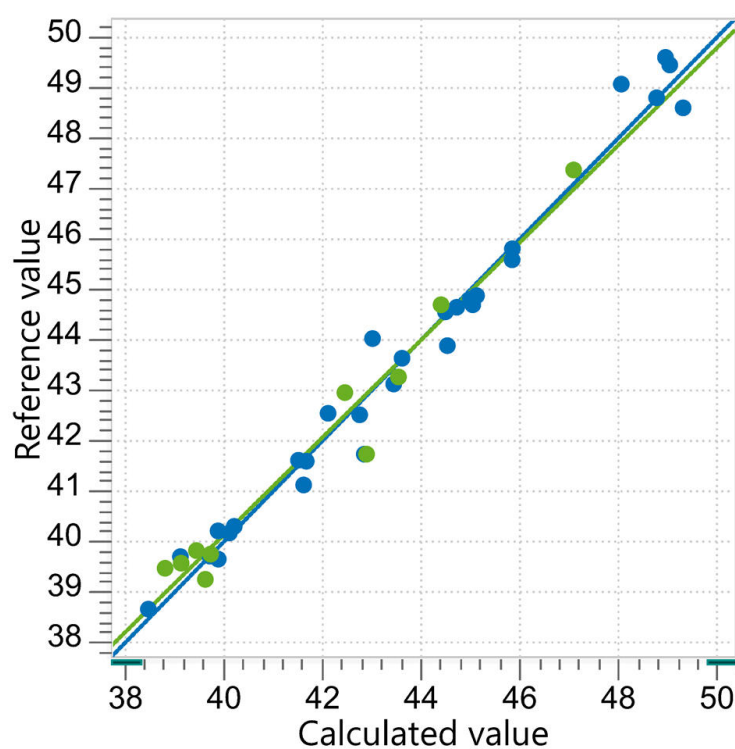
RESULT IODINE VALUE IN PRE-ENTRY SAMPLES

Figure 4. Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of iodine value in stearate pre-entry samples with the OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid. Blue dots represent the calibration dataset, and green dots represent the validation dataset.

R^2	SEC	SECV	SEP
0.962	0.40 g I ₂ /100 g	0.46 g I ₂ /100 g	0.52 g I ₂ /100 g

RESULT ACID NUMBER IN THE HYDROGENATION PROCESS

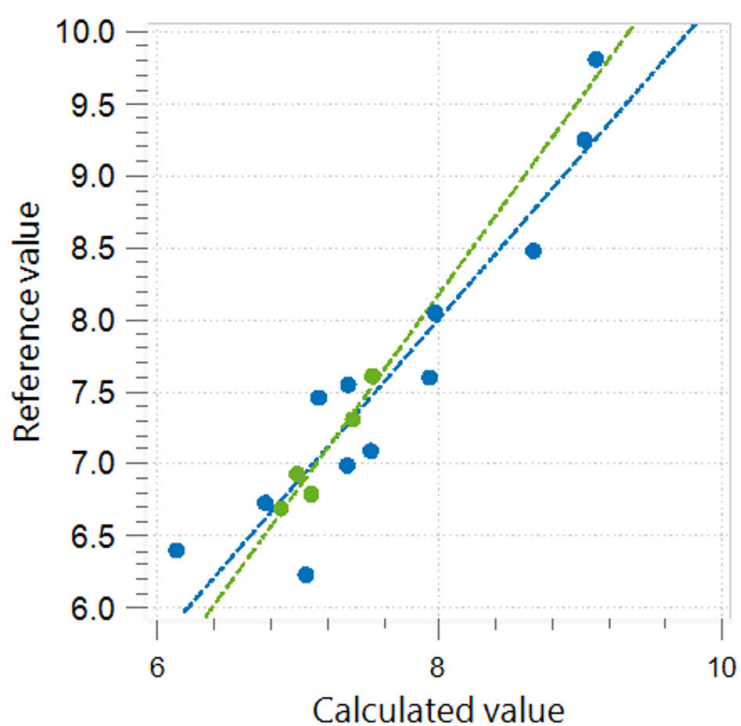


Figure 5. Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of acid number in the stearate hydrogenation process with the OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid. Blue dots represent the calibration dataset, and green dots represent the validation dataset.

R^2	SEC	SECV	SEP
0.921	0.11 mg KOH/g	0.40 mg KOH/g	0.17 mg KOH/g

RESULT ASH IN STEARATES

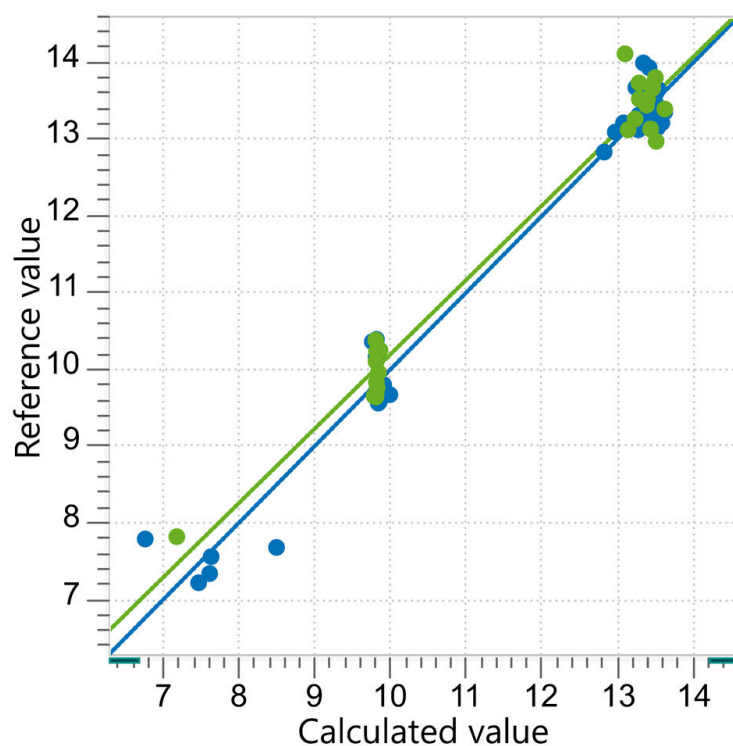


Figure 6. Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of ash content in Mg, Ca, and Zn stearate samples with the OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid. Blue dots represent the calibration dataset, and green dots represent the validation dataset.

R^2	SEC	SECV	SEP
0.971	0.29%	0.33%	0.36%

RESULT MOISTURE IN STEARATES

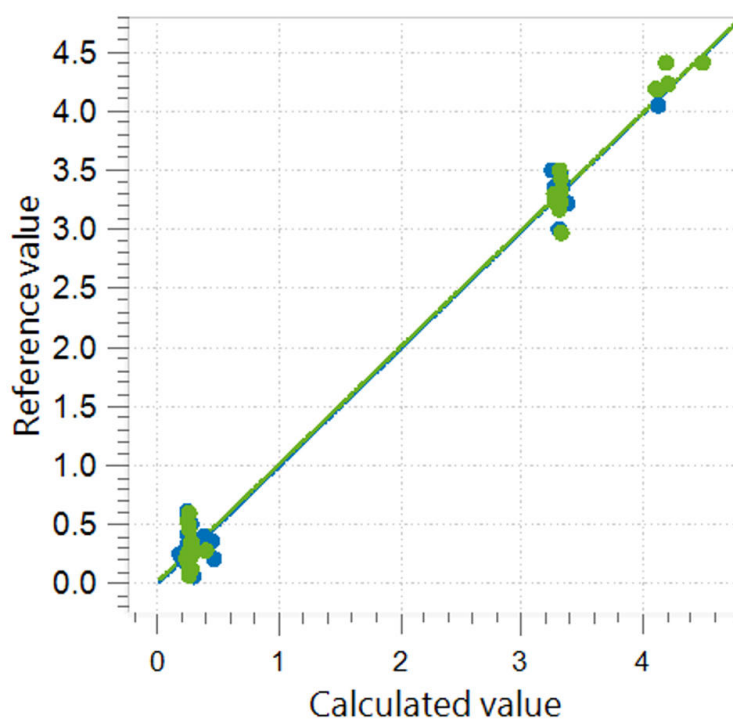


Figure 7. Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of moisture content in Mg, Ca, and Zn stearate samples with the OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid. Blue dots represent the calibration dataset, and green dots represent the validation dataset.

R^2	SEC	SECV	SEP
0.992	0.14%	0.14%	0.15%

RESULT MELTING POINT IN STEARATES

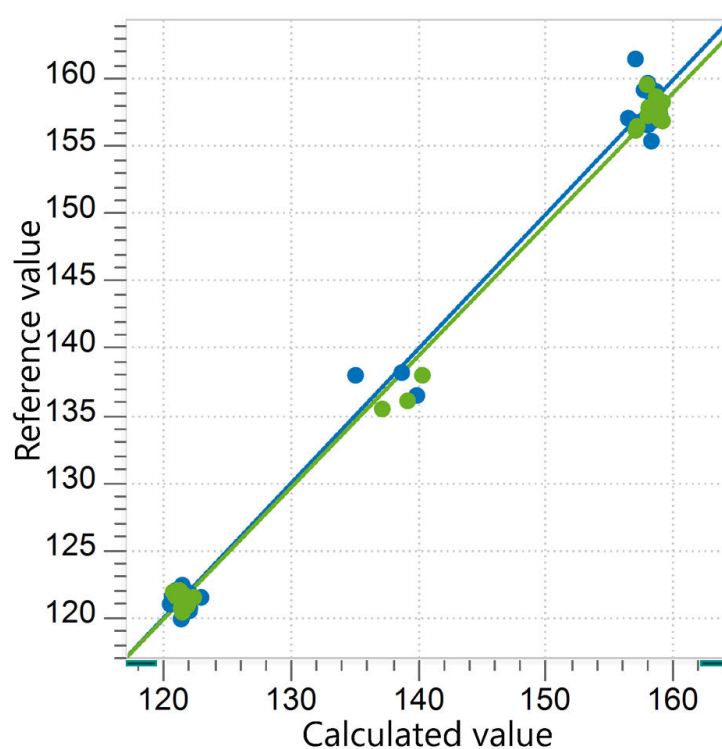


Figure 8. Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of the melting point in Mg, Ca, and Zn stearate samples with the OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid. Blue dots represent the calibration dataset, and green dots represent the validation dataset.

R^2	SEC	SECV	SEP
0.996	1.05 °C	1.40 °C	1.25 °C

RESULT GRANULOMETRY IN STEARATES

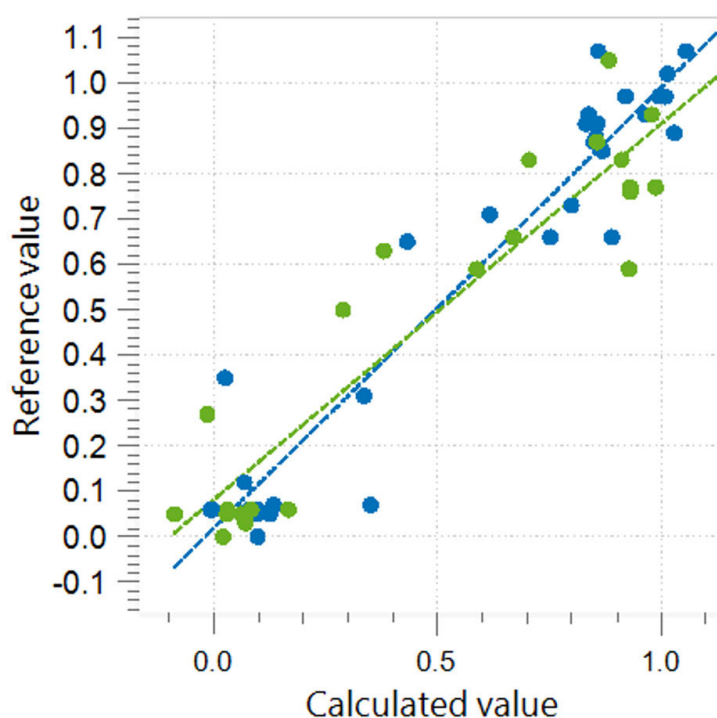


Figure 9. Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of the granulometry in Mg, Ca, and Zn stearate samples with the OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid. Blue dots represent the calibration dataset, and green dots represent the validation dataset.

R ²	SEC	SECV	SEP
0.862	0.09 mm	0.12 mm	0.15 mm

CONCLUSION

The results obtained in this study demonstrate the strong applicability of NIR spectroscopy for quantitative analysis of both process samples and final products across multiple parameters during the production of stearic acid and its salts.

The OMNIS NIR Analyzer offers significant operational advantages by combining liquid and solid measurement modules in a single instrument, making sample analysis simple and efficient. The liquid module's ability to heat samples up to 80 °C with precise temperature control ensures complete

melting of samples with higher melting points, which improves measurement accuracy and reproducibility.

The final Mg, Ca, and Zn stearates are widely used in pharmaceuticals (as tablet lubricants and excipients), cosmetics (in creams, lotions, and soaps), food (as emulsifiers and coating agents), lubricants (as thickeners and stabilizers), and other sectors such as plastics and rubber (as stabilizers and release agents). This versatility shows the importance of robust analytical solutions like NIRS for quality control across diverse industries.

CONTACT

Metrohm Schweiz AG
Industriestrasse 13
4800 Zofingen

info@metrohm.ch

CONFIGURATION



OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid

Nahinfrarot-Spektrometer für flüssige, feste und viskose Proben.

Der OMNIS NIR Analyzer ist die nach Schweizer Qualitätsstandards entwickelte und produzierte Nahinfrarotspektroskopie(NIRS)-Lösung für die Routineanalytik entlang der gesamten Produktionskette. Die Nutzung neuester Technologien und die Einbindung in die moderne OMNIS Software spiegeln sich in der Geschwindigkeit, der Bedienbarkeit und dem flexiblen Einsatz dieser NIR-Spektrometer wider.

Die Vorteile des OMNIS NIR Analyzer Liquid / Solid im Überblick:

- Messungen von flüssigen, festen und viskosen Proben in weniger als 10 Sekunden
- Schnelle sequenzielle Messung von flüssigen und festen Proben ohne Umbau des Systems
- Einfache Einbindung in ein Automationssystem oder Verknüpfung mit weiteren Analysentechniken (Titration)
- Unterstützung zahlreicher Probengefässe

Highlights Flüssigmessungen:

- Temperaturregelung an der Probe von 25 °C – 80 °C
- Automatische Detektion der Probe

Highlights Feststoffmessungen:

- Automatisierte Mehrpositionenmessungen für reproduzierbare Resultate auch bei inhomogenen Proben



Einwegvials, 28 mm, Reflexion

216 verschliesbare Einwegvials aus Glas mit einem Durchmesser von 28 mm für Analysen von Feststoffen in Reflexion. Geeignet für folgende Analyzer:

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer



Flexibler Halter OMNIS NIR

Flexibler Halter mit einem variablen Durchmesser bis zu 30 mm für die Untersuchung von Proben in Vials in Reflexion.



Einwegvial, 8 mm, Transmission, Anz. 100

100 Einwegvials aus Glas (Borosilikat) mit einer optischen Pfadlänge von 8 mm für Analysen von Flüssigkeiten in Transmission. Die Einwegvials werden mit den zugehörigen Verschlussstopfen (Stückzahl = 100) geliefert.

Kompatibel mit:

- Halter OMNIS NIR, Vial, 8 mm (6.07401.070)
- DS2500 Halter für 8 mm Einwegvials (6.7492.020)



Halter OMNIS NIR, Vial, 8 mm

Vialhalter für den OMNIS NIR Analyzer für 8 mm Einwegvials (6.7402.240).

OMNIS

A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

OMNIS

A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

OMNIS Stand-Alone Lizenz

Ermöglicht den Stand-Alone Betrieb der OMNIS Software auf einem WindowsTM Computer.

Merkmale:

- Die Lizenz enthält bereits eine OMNIS Geräte Lizenz.
- Muss über das Metrohm Lizenzierungsportal aktiviert werden.

Softwarelizenz Quant Development

Softwarelizenz für die Erstellung und Bearbeitung von Quantifizierungsmodellen in einer Stand-Alone OMNIS Software Installation.