



Application Note AN-V-197

Indirect determination of iodide in brine with stripping voltammetry

Quantification of iodide in the chlor-alkali process through iodate formation with the hanging mercury drop electrode

Monitoring the iodide concentration in NaCl brine is crucial during membrane process-based chlor-alkali electrolysis. Iodide can easily oxidize to iodate during electrolysis, leading to its precipitation and fouling of the membrane surface. Fouling can reduce the high efficiency of the membrane process and lead to increased energy consumption and decreased product quality. Therefore, monitoring the iodide concentration can help prevent fouling and protect the expensive membranes used in this process.

Stripping voltammetry, with its low detection limit and quick analysis capabilities, emerges as an attractive tool for the analysis of iodide in highly concentrated brines. By utilizing voltammetry, chlor-alkali plants can effectively monitor and manage iodide levels, thus preventing membrane fouling. This approach not only preserves membrane durability and function but also results in high performance of the electrolysis process.

SAMPLE

Sodium chloride brine, $\beta(\text{NaCl}) = 300 \text{ g/L}$

EXPERIMENTAL

Add 10 mL oxidized sodium chloride brine sample and 2 mL of ultrapure water into the measuring vessel. The determination of iodide is carried out with the 884 Professional VA (Figure 1) using the parameters specified in Table 1. The concentration is determined by two additions of iodate standard addition solution.



Figure 1. 884 Professional VA manual for MME.

Table 1. Parameters

Parameter	Setting
Mode	HMDE
Start potential	-0.7 V
End potential	-1.3 V
Sweep rate	13 mV/s
Peak potential iodide	-1.05 V

ELECTRODES

- Multi-Mode Electrode pro

RESULTS

The chlor-alkali brine solution contains a high concentration of chloride ions that can interfere with the direct measurement of iodide. By converting iodide to iodate, these interferences are minimized. The determined iodate concentration is then recalculated as iodide concentration as indicated in **Table 2**.

The method is suitable for the determination of low concentrations of iodide in sodium chloride brine ($\beta(\text{NaCl}) = 300 \text{ g/L}$) samples.

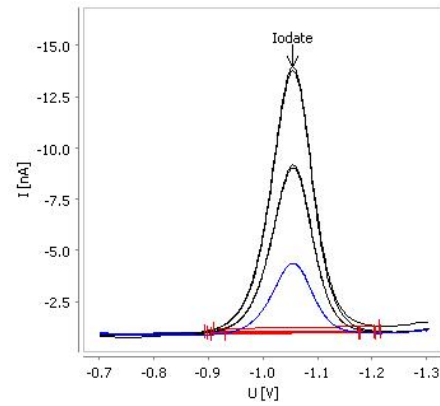


Figure 2. Determination of iodate in sodium chloride brine with stripping voltammetry.

Table 2. Result

Sample	Iodate ($\mu\text{g/L}$)
Sodium chloride brine	72.86

Table 2. Result

Sample	Iodate ($\mu\text{g/L}$)
Sodium chloride brine	72.86
Sample	Iodide ($\mu\text{g/L}$)
Sodium chloride brine	52.63

CONTACT

Metrohm Deutschland
In den Birken 3
70794 Filderstadt

info@metrohm.de

CONFIGURATION



884 Professional VA manual für Multi-Mode-Elektrode (MME)

884 Professional VA manual für Multi-Mode-Elektrode (MME) ist das Einstiegsgerät in die High-End-Spurenanalytik mit Voltammetrie und Polarographie mit der Multi-Mode-Elektrode pro, der scTRACE Gold oder der Bismut-Tropfenelektrode. Die bewährte Metrohm-Elektrodenteknik in Kombination mit einem leistungsfähigen Potentiostaten/Galvanostaten und der extrem flexiblen viva-Software eröffnet neue Perspektiven für die Bestimmung von Schwermetallen. Der Potentiostat mit zertifiziertem Kalibrator justiert sich vor jeder Messung automatisch neu und garantiert höchstmögliche Präzision.

Mit dem Gerät können auch Bestimmungen mit rotierenden Scheibenelektroden durchgeführt werden, zum Beispiel Bestimmungen von organischen Additiven in galvanischen Bädern mit «Cyclic Voltammetric Stripping» (CVS), «Cyclic Pulse Voltammetric Stripping» (CPVS) und Chronopotentiometrie (CP). Der austauschbare Messkopf ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen den verschiedenen Applikationen mit unterschiedlichen Elektroden.

Zur Steuerung, Datenerfassung und -auswertung wird die Software **viva** benötigt.

Das 884 Professional VA manual für MME wird mit umfangreichem Zubehör und Messkopf für die Multi-Mode-Elektrode pro geliefert. Elektrodensatz und **viva**-Lizenz sind separat zu bestellen.