



Application Note AN-NIR-150

Monitoring the production of stearic acid and its salts with NIR spectroscopy

Acid number, iodine value, granulometry, moisture, and more

Stearic acid and its derivatives (e.g., magnesium, calcium, and zinc stearates) are widely used in the lubricants, pharmaceutical, cosmetics, plastics, and food industries. Producing these materials involves several steps: clarification, hydrogenation, cleavage, and distillation, followed by converting stearic acid into its respective stearates. This Application Note demonstrates how the OMNIS NIR Analyzer can be

used to monitor the stearic acid iodine value, acid value, moisture, ash content, melting point, and granulometry during the production process and in the final product. Near-infrared (NIR) spectroscopy is a rapid, nondestructive analytical technique that is fast becoming a preferred method over other slower, more costly alternatives.

EXPERIMENTAL EQUIPMENT

Quality control during stearic acid production is essential to guarantee consistency and compliance with industry standards. Each stage of the process,

Pre-entry (raw material):

Acid number/iodine value – 44/40 samples

Hydrogenation:

Acid number – 17 samples

Cleavage:

Acid number – 99 samples

Mg, Ca, and Zn stearates:

Ash, granulometry, melting point, and moisture – 69 samples

During stearic acid production, samples occur in two forms depending on the process stage. Early steps involve liquid samples (a viscous mixture of saturated fatty acids and/or animal fat). After purification, the product solidifies into flakes, powder, or pellets, representing the final stearic acids and their salts. Since quality control is required at different stages of production, both liquid and solid sample types can be measured with the OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid (Figure 1). This allows an easy transition from monitoring intermediate products to performing quality control of final stearic acids.

The OMNIS Software (Table 1) was used for all data acquisition, and prediction model development was

from initial raw material preparation to the final conversion into stearates, requires analytical checks. The samples used in this study include:



Figure 1. OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid.

done with the help of the OMD (OMNIS Model Developer).

Liquid samples (pre-entry, hydrogenation, cleavage):

- Each sample was measured in transmission mode using an 8 mm disposable vial.
- Spectra were collected at 75 °C using the vessel temperature control mode.

Solid samples (Mg, Ca, and Zn stearates):

- Each sample was measured by reflectance mode in a 28 mm disposable vial.

Table 1. Hardware and software equipment overview.

Equipment	Article Number
OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid	2.1072.0010
Disposable vials, 28 mm, reflection	6.7402.140
Flexible holder OMNIS NIR	6.07402.300
Disposable vial, 8 mm, transmission	6.7402.240
Holder OMNIS NIR, vial, 8 mm	6.07401.070
OMNIS Stand-Alone license	6.06003.010
Software license Quant Development	6.06008.002

RESULT

NIR spectroscopy was successfully applied to monitor both process samples and final stearate products. **Figure 2** shows NIR spectra collected from cleavage samples, illustrating the spectral information used for model development. Quantitative models were developed for stearic acid's acid value, iodine value, moisture, ash content, melting point, and granulometry. The reference values used were obtained using the routine quality control methods employed during stearic acid and stearate production. **Figures 3–9** present the correlation plots and

corresponding figures of merit (FOMs) for each parameter. The data points along the regression line indicate good correlation between the NIR model and the reference method. The FOMs provide additional information about model performance, including calibration accuracy and robustness.

Overall, the developed models demonstrated good correlation with the laboratory reference values, indicating that the selected NIR spectral range contains sufficient information for reliable quality control throughout the production process.

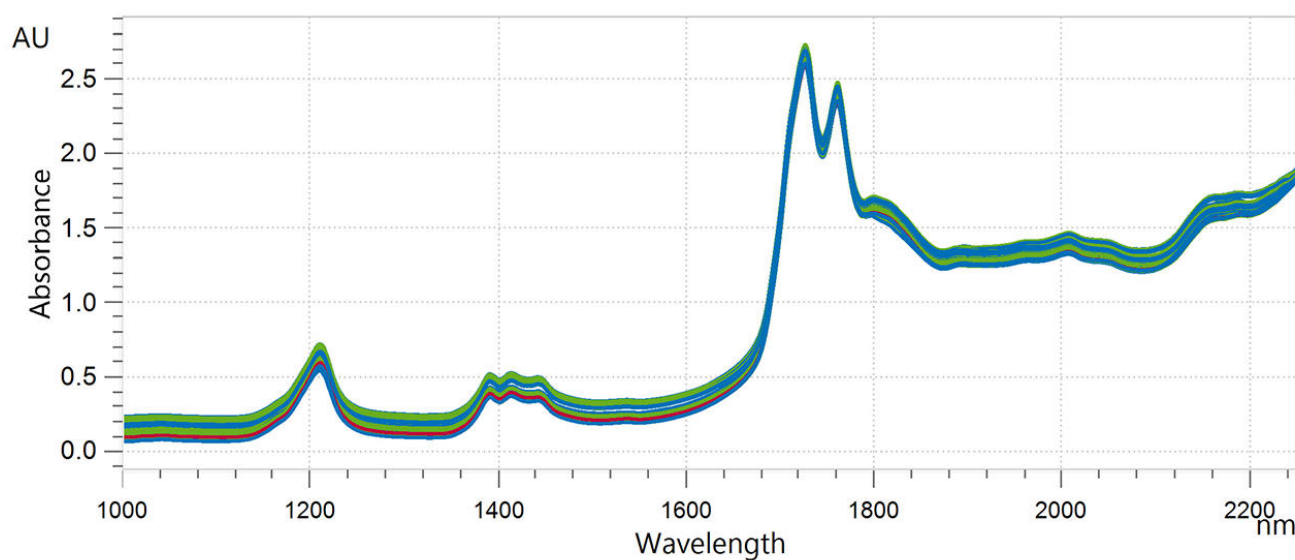


Figure 2. NIR spectra of the stearate cleavage samples collected by transmission mode in an 8 mm vial at 75 °C. These spectra were collected with the OMNIS NIR Analyzer in the liquid sample configuration.

RESULT ACID NUMBER IN PRE-ENTRY SAMPLES

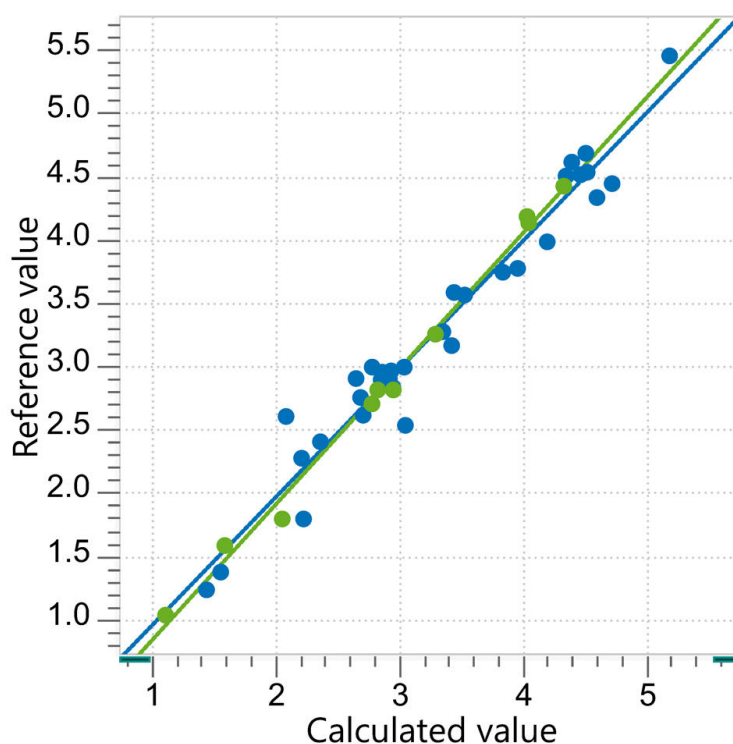


Figure 3. Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of acid number in stearate pre-entry samples with the OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid. Blue dots represent the calibration dataset, and green dots represent the validation dataset.

R^2	SEC	SECV	SEP
-------	-----	------	-----

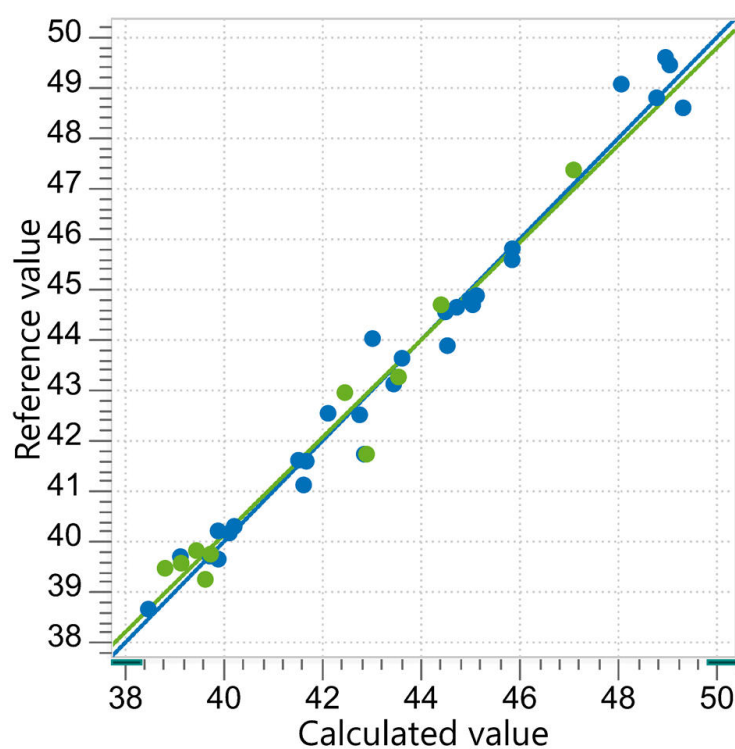
RESULT IODINE VALUE IN PRE-ENTRY SAMPLES

Figure 4. Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of iodine value in stearate pre-entry samples with the OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid. Blue dots represent the calibration dataset, and green dots represent the validation dataset.

R^2	SEC	SECV	SEP
0.962	0.40 g I ₂ /100 g	0.46 g I ₂ /100 g	0.52 g I ₂ /100 g

RESULT ACID NUMBER IN THE HYDROGENATION PROCESS

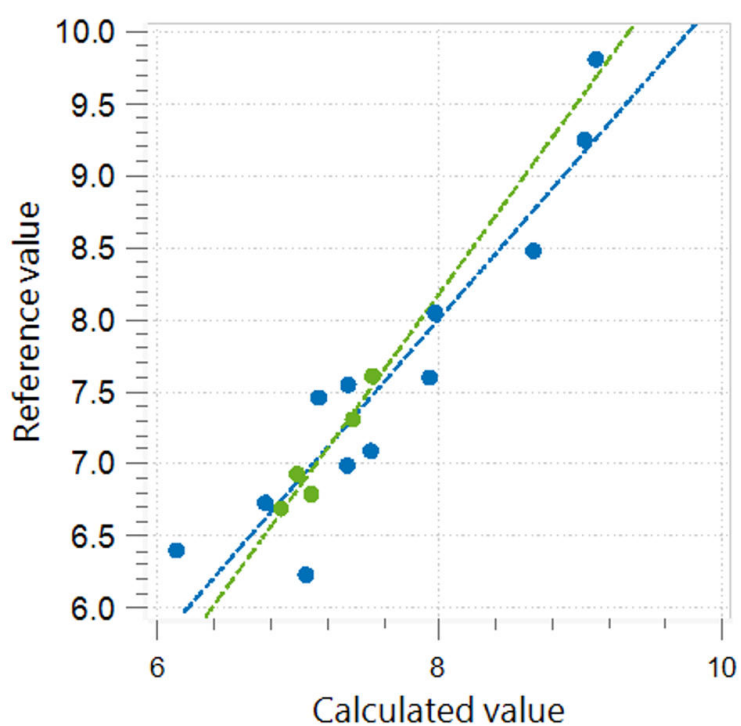


Figure 5. Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of acid number in the stearate hydrogenation process with the OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid. Blue dots represent the calibration dataset, and green dots represent the validation dataset.

R^2	SEC	SECV	SEP
0.921	0.11 mg KOH/g	0.40 mg KOH/g	0.17 mg KOH/g

RESULT ASH IN STEARATES

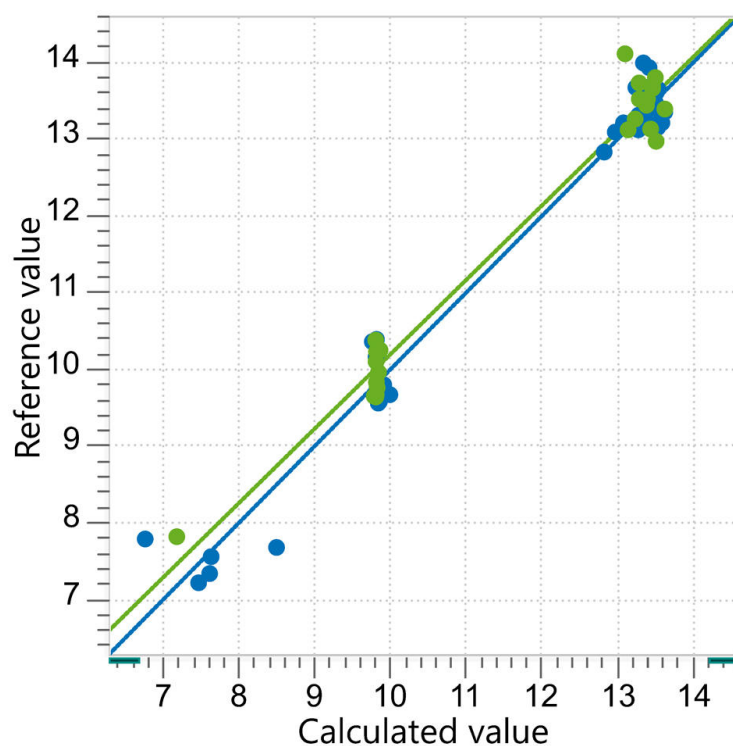


Figure 6. Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of ash content in Mg, Ca, and Zn stearate samples with the OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid. Blue dots represent the calibration dataset, and green dots represent the validation dataset.

R^2	SEC	SECV	SEP
0.971	0.29%	0.33%	0.36%

RESULT MOISTURE IN STEARATES

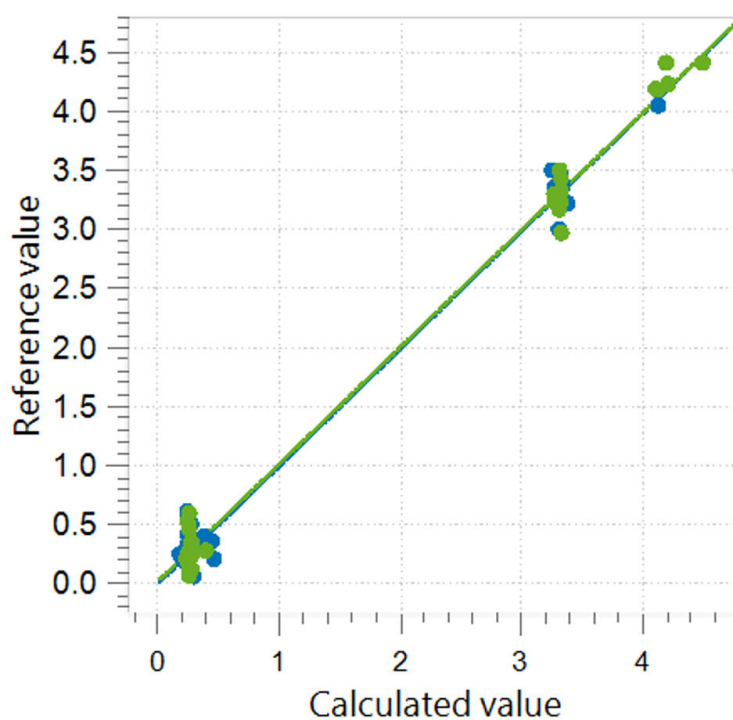


Figure 7. Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of moisture content in Mg, Ca, and Zn stearate samples with the OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid. Blue dots represent the calibration dataset, and green dots represent the validation dataset.

R^2	SEC	SECV	SEP
0.992	0.14%	0.14%	0.15%

RESULT MELTING POINT IN STEARATES

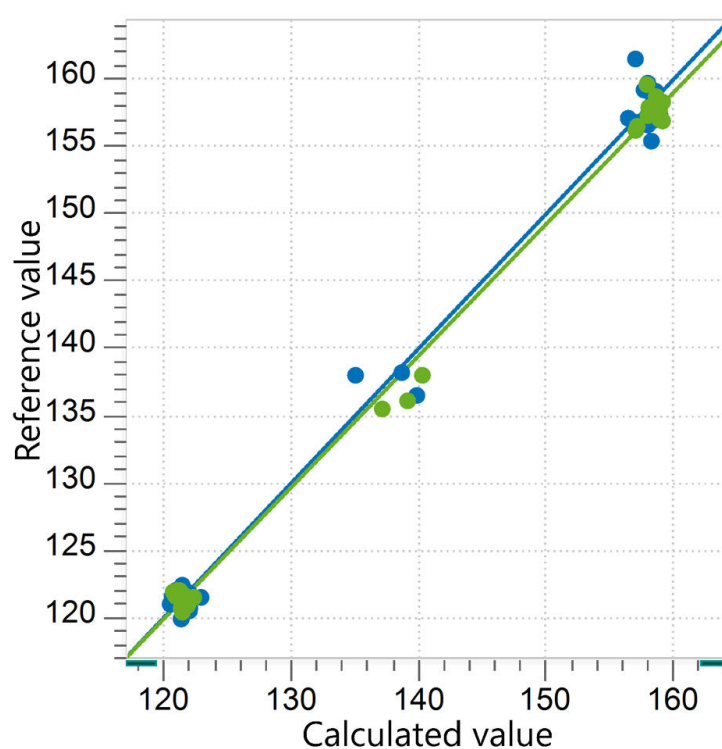


Figure 8. Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of the melting point in Mg, Ca, and Zn stearate samples with the OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid. Blue dots represent the calibration dataset, and green dots represent the validation dataset.

R^2	SEC	SECV	SEP
0.996	1.05 °C	1.40 °C	1.25 °C

RESULT GRANULOMETRY IN STEARATES

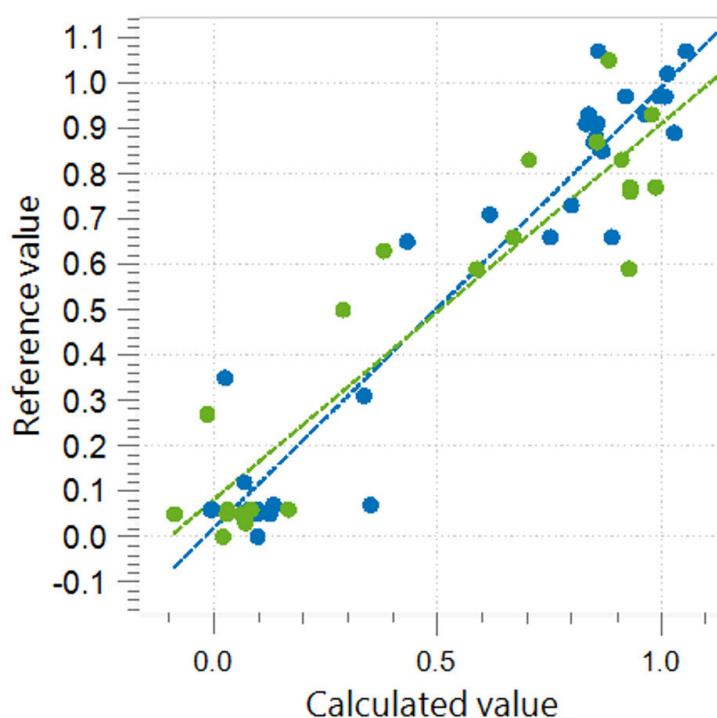


Figure 9. Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of the granulometry in Mg, Ca, and Zn stearate samples with the OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid. Blue dots represent the calibration dataset, and green dots represent the validation dataset.

R ²	SEC	SECV	SEP
0.862	0.09 mm	0.12 mm	0.15 mm

CONCLUSION

The results obtained in this study demonstrate the strong applicability of NIR spectroscopy for quantitative analysis of both process samples and final products across multiple parameters during the production of stearic acid and its salts.

The OMNIS NIR Analyzer offers significant operational advantages by combining liquid and solid measurement modules in a single instrument, making sample analysis simple and efficient. The liquid module's ability to heat samples up to 80 °C with precise temperature control ensures complete

melting of samples with higher melting points, which improves measurement accuracy and reproducibility.

The final Mg, Ca, and Zn stearates are widely used in pharmaceuticals (as tablet lubricants and excipients), cosmetics (in creams, lotions, and soaps), food (as emulsifiers and coating agents), lubricants (as thickeners and stabilizers), and other sectors such as plastics and rubber (as stabilizers and release agents). This versatility shows the importance of robust analytical solutions like NIRS for quality control across diverse industries.

CONTACT

Metrohm México
Calle. Xicoténcatl #181, Col
Del Carmen, Alcaldía
Coyoacán.
04100. Ciudad de México
México

info@metrohm.mx

CONFIGURATION



OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid

Espectrómetro del infrarrojo cercano para el análisis de muestras de materia sólida, líquidas y viscosas.

Desarrollado y producido de conformidad con las normas de calidad suizas, el OMNIS NIR Analyzer es la solución de espectroscopía del infrarrojo cercano (NIRS) para efectuar análisis de rutina en toda la cadena de producción. La aplicación de las tecnologías más avanzadas y la integración en el moderno OMNIS Software se reflejan en la velocidad, la manejabilidad y el uso flexible de este espectrómetro NIR.

Visión conjunta de las ventajas del OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid:

- Medidas de muestras de materia sólida, fluidas y viscosas en menos de 10 segundos
- Rápida medida secuencial de muestras sólidas y líquidas, sin conversión del sistema
- Sencilla integración en un sistema de automatización o vinculación con tecnologías de análisis adicionales (titulación)
- Permite usar numerosos recipientes de muestras

Aspectos destacados de las medidas de líquidos:

- Regulación de temperatura de la muestra en el rango de 25–80 °C
- Detección automática de la muestra

Aspectos destacados de las medidas de materia sólida:

- Medidas automatizadas automáticas en múltiples posiciones para resultados reproducibles, incluso con muestras no homogéneas



Viales desechables, 28 mm, para reflexión

216 viales de vidrio desechables y cerrables con un diámetro de 28 mm para el análisis de sólidos en reflexión. Aptos para los siguientes instrumentos de análisis:

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer



Soporte flexible OMNIS NIR

Soporte flexible con un diámetro variable de hasta 30 mm para el examen de muestras en viales en reflexión.



Vial desechable, 8 mm, para transmisión, 100 unidades

100 viales desechables de vidrio (borosilicato) con una longitud de recorrido óptico de 8 mm para el análisis de líquidos en transmisión. Los viales desechables se suministran con los correspondientes tapones de cierre (100 unidades).

Compatibles con:

- Soporte OMNIS NIR para vial de 8 mm (6.07401.070)
- Soporte DS2500 para viales desechables de 8 mm (6.7492.020)



Soporte OMNIS NIR, vial, 8 mm

Soporte de viales para el OMNIS NIR Analyzer para viales desechables de 8 mm (6.7402.240).

OMNIS

A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

OMNIS

A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Licencia "Stand-Alone" de OMNIS

Habilita el modo "Stand-Alone" del software OMNIS en un ordenador con Windows™.

Características:

- Se incluye una licencia de los aparatos OMNIS.
- Debe activarse en el portal de licencias de Metrohm.

Licencia de software de Quant Development

Licencia de software para la creación y edición de modelos de cuantificación en una instalación de OMNIS Software "Stand-Alone".