



Application Note AN-V-235

Cadmium in chocolate

Determination using anodic stripping voltammetry after dry ashing in a muffle furnace

The element cadmium (Cd) is toxic to humans and can be found in the environment as a natural contaminant. Some soils contain increased cadmium concentrations in combination with high bioavailability. Under such conditions, the cacao tree can accumulate cadmium, mainly in the beans, which are then processed into cocoa. Chocolate produced from the affected beans will contain elevated cadmium levels.

To reduce the risk for consumers the maximum concentration in chocolate and other foods is often limited by the government. Typical limit values in the

European Union are between 100 µg/kg and 800 µg/kg (EU Commission Regulation 1881/2006) depending on the cocoa content of the chocolate. Chocolate produced from cocoa beans with increased cadmium concentrations may exceed the maximum concentration limit.

Anodic stripping voltammetry (ASV) can be used to accurately determine trace quantities of cadmium in chocolate down to approximately 10 µg/kg. The method is simple to perform, specific, and free of interferences. Prior to determination the samples are ashed in a furnace at 450 °C.

SAMPLES

Dark chocolate, milk chocolate, cocoa powder

EXPERIMENTAL

First, the samples are mineralized by dry ashing in a furnace at 450 °C for 16 hours. The remaining ash is then dissolved in a small amount of concentrated nitric acid and diluted with ultrapure water. The cadmium determination is carried out on the 884 Professional VA with the Multi-Mode Electrode pro as working electrode using the parameters listed in **Table 1**. The concentration of Cd is determined by two additions of Cd standard addition solution.



Figure 1. 884 Professional VA

Table 1. Parameters for ASV analysis of Cd in chocolate

Parameter	Setting
Working electrode	HMDE
Mode	DP – Differential Pulse
Deposition potential	-0.8 V
Deposition time	60 s
Start potential	-0.8 V
End potential	-0.2 V
Peak potential Cd	-0.55 V

ELECTRODES

- Working electrode: Multi-Mode Electrode pro with silanized glass capillaries
- Reference electrode: Ag/AgCl/KCl (3 mol/L) reference electrode with electrolyte vessel. Bridge electrolyte: KCl (3 mol/L)
- Auxiliary electrode: Platinum rod electrode

RESULTS

The determination of Cd in dissolved ash of chocolate samples can be carried out in a simple and straightforward manner with ASV. The method is

selective and free of interferences. It is suitable for cadmium concentrations down to 10 µg/kg with respect to the solid chocolate sample.

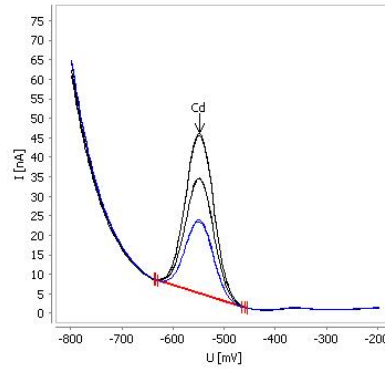


Figure 2. Determination of Cd in dark chocolate (72% cocoa).

Table 2. Results of Cd analysis with the 884 Professional VA

Sample	Cd [µg/kg]
Milk chocolate (29% cocoa)	10.4
Milk chocolate (34% cocoa)	37.0
Dark chocolate (72% cocoa)	164
Dark chocolate (87% cocoa)	346
Cocoa powder	98.2

Internal reference: AW VA CH4-0579-032019

CONTACT

Metrohm France
13, avenue du Québec - CS
90038
91978 VILLEBON
COURTABOEUF CEDEX

info@metrohm.fr

CONFIGURATION



884 Professional VA manual pour électrode Multi Mode (MME)

Le 884 Professional VA manual pour électrode Multi Mode (MME) représente l'appareil d'entrée de gamme pour les analyses de traces high-end avec la voltampérométrie et la polarographie à l'aide de l'électrode Multi Mode pro, du scTRACE Gold ou de l'électrode goutte à goutte au bismuth. La technique éprouvée des électrodes de Metrohm associée à un potentiostat/galvanostat performant et le logiciel viva extrêmement flexible fait entrevoir de nouvelles perspectives pour la détermination des métaux lourds. Le potentiostat avec un calibrateur certifié se réajuste avant chaque mesure automatiquement et garantit la plus grande exactitude possible.

Cet appareil permet également des déterminations à l'aide d'électrodes à disque tournantes, par exemple des déterminations d'additifs organiques dans des bains galvaniques avec la voltampérométrie cyclique inverse (Cyclic Voltammetric Stripping = CVS), la voltampérométrie cyclique inverse pulsée (Cyclic Pulse Voltammetric Stripping = CPVS) et la chronopotentiométrie (CP). La tête de mesure amovible permet de passer rapidement d'une application à l'autre avec différentes électrodes.

Le logiciel **viva** est nécessaire pour contrôler, collecter et évaluer les données.

Le 884 Professional VA manual pour MME est livré avec de nombreux accessoires et une tête de mesure pour l'électrode Multi Mode pro. Le jeu d'électrodes et la licence **viva** doivent être commandés séparément.



Équipement d'électrodes VA avec électrode Multi Mode pro pour les appareils Professional VA

Jeu d'électrodes complet pour les déterminations polarographiques et voltampérométriques. Comporte une électrode Multi Mode pro, une électrode de référence, une électrode auxiliaire en platine, un bécher de mesure, un agitateur, une solution d'électrolyte et d'autres accessoires pour le montage et l'utilisation de l'électrode Multi Mode.