



Application Note AN-RS-055

Low-frequency Raman spectroscopy

Raman spectroscopy is an analytical tool that enables the measurement of molecular structure and the identification of materials based on the rotational and vibrational modes of a molecule. Most laboratory Raman systems cover the fingerprint spectral region ranging from 200–3400 cm^{-1} . However, access to the lower-frequency areas provides additional information for applications in protein characterization [1], polymorph detection and identification [2], along with material phase and

structure determination.

The lab-grade fiber optic sampling probe for laboratory spectrometers from Metrohm can access lower-frequency modes down to 65 cm^{-1} , providing a cost-effective solution for wider range measurements. This Application Note describes the use of low-frequency Raman spectroscopy for studying amino acids, polymorph detection, and phase change monitoring.

INTRODUCTION

The low-frequency region augments the information content from the fingerprint region of the Raman spectrum and broadens possible applications. Detection of hydrogen bonds and other structural

EXPERIMENT

Metrohm's i-Raman Plus 785S laboratory Raman spectrometer with a 785 nm, 300 mW (maximum power output) laser and a sensitive, thermoelectrically cooled back-thinned CCD (charge-coupled detector) is used to collect Raman spectra.

The i-Raman Plus is equipped with a unique fiber

features, such as polymorphism, can be differentiated using this region of the spectrum. The result is increased specificity for very similar materials.

optic probe that supports data collection over a full spectral range of 65–3500 cm^{-1} with a spectral resolution of 4.5 cm^{-1} .

Raman spectra are collected at room temperature using SpecSuite software with integration ranging from 100 ms to 10 s.

AMINO ACIDS

Raman spectroscopy is used to study the structure and conformation of amino acids – the building blocks of proteins. The low-frequency portion of the Raman spectrum is a necessary source of information for a comprehensive study of amino acids. This is obvious in the 65–3200 cm^{-1} region of the Raman spectrum of L-asparagine in **Figure 1**. Specifically, the vibrational information in a Raman spectrum can help interpret molecular interactions and biological processes [3].

Figure 1 shows both the fingerprint region (blue) as well as the low-frequency Raman region (red) for L-asparagine; note the three dominant bands below 200 cm^{-1} .

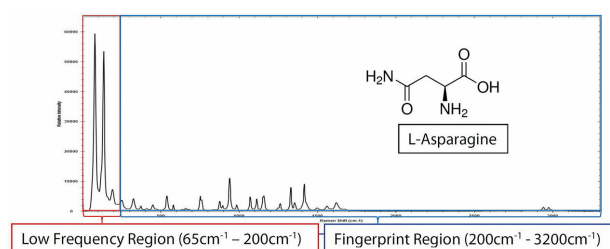


Figure 1. Metrohm's i-Raman Plus with standard lab-grade probe is used to collect the low-frequency spectra of L-asparagine with a total integration time of 1.2 s.

POLYMORPH DETECTION

Determining the structural form of active pharmaceutical ingredients (APIs) is of great concern for the pharmaceutical industry. This is especially true during drug development, manufacturing, and final product quality control.

APIs exhibit polymorphism – identical chemical composition but different solid-state structures. Polymorphs may affect bioavailability and therapeutic index, so the efficacy of a drug can be compromised if the wrong form is used [2]. Pseudo-polymorphs include solvents suspended in a lattice structure.

Figure 2 provides an example of the pseudo-polymorph D-glucose, demonstrating the ability of the i-Raman Plus probe to detect differences between monohydrate and anhydrous forms at frequencies below 200 cm^{-1} .

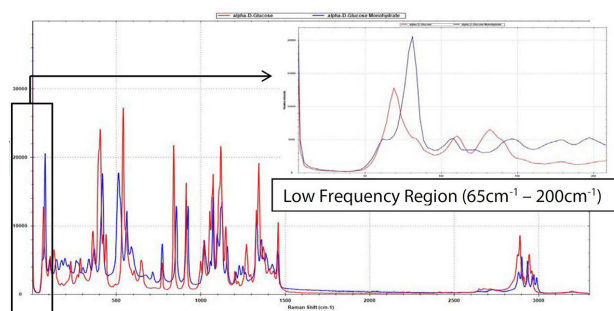


Figure 2. Raman spectra of α -D-glucose (red) and α -D-glucose monohydrate (blue), taken with 10 s integration time. Note the significant difference between the two pseudo-polymorphs within the low-frequency range (see inlay).

MONITORING PHASE CHANGE

A change from one polymorph to another as a result of melting followed by recrystallization can be observed in the low-frequency region. Exceptional specificity is required to monitor such phase changes, and the probe of the i-Raman Plus is well-suited, as demonstrated for sulfur (**Figure 3**).

Solid α -sulfur is deposited onto an aluminum tray and heated with a hot plate while Raman spectra are collected with an i-Raman Plus and fiber probe, using a laser power of 300 mW and 0.1 s integration time to measure both the solid and liquid phase.

After the sample is heated above its melting point at $115.2\text{ }^{\circ}\text{C}$, the low-frequency peak at 83.6 cm^{-1} broadened and shifted, indicating the change from the α - to the λ -form. Note that there are no observable changes within the fingerprint region (**Figure 3**).

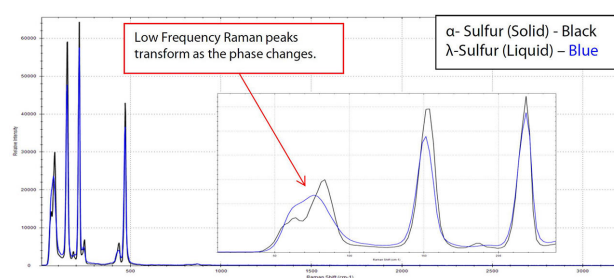


Figure 3. Raman spectra of sulfur transitioning from the α -crystalline form to the λ -liquid form, taken with 0.1 s integration time. Note significant broadening in the peaks located in the low-frequency region (see inlay).

CONCLUSION

The i-Raman Plus 785S Raman spectrometer is a valuable tool for applications requiring low-frequency Raman detection down to 65 cm^{-1} . The ability to characterize polymorphs and solvated forms supports manufacturing and formulation processes in pharmaceutical and biological industries.

Along with protein, polymorph, and phase characterization, low-frequency Raman spectroscopy can also be used to study semiconductor lattices [4], carbon nanotubes [5], solar cells, and an assortment of minerals, pigments and gemstones.

REFERENCES

1. Teixeira, A. M. R.; Freire, P. T. C.; Moreno, A. J. D.; et al. High-Pressure Raman Study of L-Alanine Crystal. *Solid State Communications* **2000**, *116* (7), 405–409.
[https://doi.org/10.1016/S0038-1098\(00\)00342-2](https://doi.org/10.1016/S0038-1098(00)00342-2).
2. Larkin, P. J.; Dabros, M.; Sarsfield, B.; et al. Polymorph Characterization of Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) Using Low-Frequency Raman Spectroscopy. *Appl Spectrosc* **2014**, *68* (7), 758–776.
<https://doi.org/10.1366/13-07329>.
3. Golichenko, B. O.; Naseka, V. M.; Strelchuk, V. V.; et al. Raman Study of L-Asparagine and L-Glutamine Molecules Adsorbed on Aluminum Films in a Wide Frequency Range. *Semicond. Phys. Quantum Electron. Optoelectron.* **2017**, *20* (3), 297–304.
<https://doi.org/10.15407/spqeo20.03.297>.
4. Smith, E.; Dent, G. *Modern Raman Spectroscopy: A Practical Approach*, 2nd ed.; John Wiley & Sons, 2019.
5. Pelletier, M. J. *Analytical Applications of Raman Spectroscopy*, 1st ed.; Blackwell Science: Oxford, 1999.

CONTACT

Metrohm France
13, avenue du Québec - CS
90038
91978 VILLEBON
COURTABOEUF CEDEX

info@metrohm.fr

CONFIGURATION



i-Raman Plus 785S

i-Raman Plus 785S est un spectromètre Raman haute résolution de qualité recherche conçu pour offrir précision et polyvalence dans un format compact et portable. Équipé d'un laser de 785 nm et d'une large gamme spectrale de 65 à 3 350 cm^{-1} , il offre d'excellentes performances pour les analyses qualitatives et quantitatives. Son détecteur CCD refroidi par effet Peltier garantit des mesures à faible bruit de fond, même pendant des temps d'intégration prolongés, ce qui le rend idéal pour détecter les signaux Raman faibles dans des applications telles que la conservation des œuvres d'art, la minéralogie et la SERS.

Le système prend en charge un échantillonnage flexible à l'aide d'une sonde à fibre optique et d'accessoires tels qu'un support de cuve, un vidéomicroscope et une platine XYZ. Piloté par le logiciel SpecSuite, le 785S fournit une analyse de données sophistiquée et une identification spectrale.

i-Raman Plus 785S est la solution idéale pour les équipes qui ont besoin d'une analyse Raman fiable pour une large gamme spectrale dans des environnements opérationnels difficiles, de la recherche en laboratoire à la recherche sur le terrain.

Découvrez comment l'i-Raman Plus offre une technologie Raman de qualité recherche dans un package accessible :

- Large couverture spectrale et configurations de spectromètre haute résolution.
- Le faible encombrement du système, sa conception légère et sa faible puissance absorbée garantissent des capacités d'analyse Raman de qualité recherche en tout lieu.
- i-Raman Plus est équipé d'une sonde à fibres optiques pour un échantillonnage simplifié et peut être utilisé avec un support de cuve, un vidéomicroscope et une platine de positionnement XYZ avec un support de sonde.
- i-Raman plus est pris en charge par le logiciel SpecSuite pour faciliter la collecte des données Rama, en plus de la création de modèles quantitatifs, de l'identification à l'aide de bibliothèques spectrales et de l'analyse de routine.



Sonde Raman de qualité laboratoire (785 nm)

Ensemble de sonde Raman à fibre optique de qualité laboratoire avec bouton déclencheur. Longueur de la fibre 1,5 mètre. Compatible avec les modèles i-Raman Plus 785S et 785HR.