

Portable Raman Instrumentation for SERS Applications

Surface enhanced Raman spectroscopy (SERS) has attracted significant attention in recent years due to rising interest in trace level detection in the field for applications such as environmental safety, food safety, and homeland security. The worldwide number of SERS publications has jumped from approximately 3000 to 25,000 between the years 2000 and 2011[1]. The development of SERS technology is being driven by a need to overcome the technical barrier of the lower detection limit with Raman spectroscopy as well as the need for trace level detection of explosive compounds, chemical residuals, and biomedical diagnostics.

It is widely believed that surface enhancement mechanisms are mainly a result of either electromagnetic resonances between the collective oscillations of plasmons in metal particles and the incident optical field or chemical enhancement through the increase of molecule polarization after coupling with the metal surface[2]. With the advancements in nanotechnology, SERS technology has entered an era where SERS chips are made with highly controlled nanostructures on a substrate using metals such as gold or silver. Another type of SERS is solution-based that uses colloidal solutions of silver or gold particles.

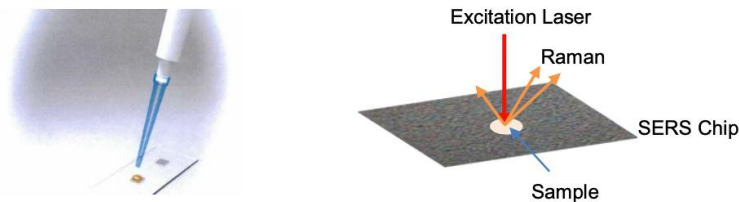


Figure 1. Illustration of a Raman Measurement Using a SERS Chip

RAMAN INSTRUMENTATION FOR SERS

For SERS developers or end users of SERS who are interested in a specific SERS application, the centerpiece of their experimental or technological platform must be a Raman setup that provides reliable lab grade performance and is affordable and portable, allowing them to tackle real world problems. The new generation of dispersive portable Raman spectrometers has brought SERS one step closer to real world applications. Due to the small area of the SERS substrate ($\sim 5 \times 5 \text{ mm}^2$) where a tiny droplet of sample solution is deposited, accurate laser

focusing on the surface is an essential requirement for the Raman instrumentation. While benchtop microscopic Raman systems meet this requirement, the fact that such instruments cannot be moved around hinders SERS developers from transferring their technologies to environments such as production lines, field testing or diagnostic locations where SERS analysis is intended to be carried out. The high cost of a benchtop micro-Raman also limits the adoption of SERS for real world applications.

The B&W Tek i-Raman Plus portable Raman system

coupled with a [BAC151](#) video microscope sampling accessory inside a BAC152 laser Class 1 enclosure is an ideal setup for SERS analysis. For solution-based SERS, if the measurement is conducted directly through the

solution vial, the [BCR100A](#) Raman cuvette holder can be used with the i-Raman Plus.



High signal to noise ratio for best limit of detection

The B&W Tek i-Raman Plus features a back-thinned CCD detector with TE-cooling to -2 °C. Compared to a conventional front-illuminated CCD with a quantum efficiency at 50%, the back-thinned CCD quantum efficiency can reach up to 90%. Because of the low efficiency of the Raman phenomenon (10^{-8}), it is important that the electronic noise for the CCD detectors is at very low levels relative to the Raman signal. The TE-cooling of the CCD device effectively

reduces the noise: dark noise halves for each 7 °C decrease in device temperature. The cooled detector in the i-Raman Plus allows for long integration times of up to 30 minutes. This greatly increases the detection limit and makes the low-light level applications such as SERS feasible. The 785 nm laser wavelength should be used for fluorescence reduction.

High resolution to resolve peaks of the substrate and the sample

For some SERS chips, there are intrinsic Raman peaks from the blank SERS surface. When the Raman peaks from the sample material are in the vicinity of the peaks from the blank SERS substrate, it is crucial that the sample Raman peaks can be separated from the peaks of the SERS chip. The spectral resolution for the i-Raman Plus 785S system is 4.5 cm^{-1} , which provides

adequate resolving capability to differentiate two very closely positioned peaks. **Figure 2** displays an example of two closely located peaks, with one peak (641 cm^{-1}) associated with the blank SERS and one peak (625 cm^{-1}) associated with the sample solution that is enhanced by SERS.

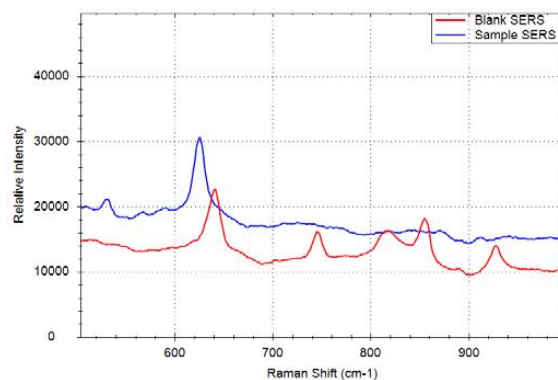


Figure 2. Raman Spectra of a blank SERS surface (red) and a sample material on SERS

Small laser beam size and accurate focusing control

Due to the fact that the SERS chips are often very small in size, small laser beam size and accurate laser focusing control are needed. The [BAC151](#) video microscope sampling accessory coupled with the [i-Raman Plus](#) provides a laser beam size from 21 μm up

to 210 μm when objective lenses with different magnifications are used. **Table 1** displays the laser beam size and working distance when the objective lens magnification changes from 10x to 100x.

Table 1: Laser spot size from BAC151

Objective lens magnification	Working distance (mm)	Laser beam spot size (μm)
10x	16	210
20x	12	105
50x	9.15	42
100x	3.2	21

Laser safety and blocking of ambient light interference

Because many types of SERS chips will generate specular reflective light when the excitation laser beam is directed onto the SERS surface, it is necessary to have an enclosure that can shield off the reflected

laser beams and at the same time block interference from ambient light. For this, the BAC152 provides a laser Class 1 enclosure for laser safety and the necessary blocking of ambient light as well.

CONCLUSIONS

The B&W Tek i-Raman Plus portable Raman system coupled with a BAC151 video microscope sampling accessory inside a BAC152 laser Class 1 enclosure provides an ideal setup for SERS applications. The setup provides not only a high S/N ratio for best detection limit and high resolution to resolve peaks,

but also the small and adjustable laser beam size along with accurate focusing control. Last but certainly not least, the laser Class 1 enclosure provides the necessary laser safety while at the same time eliminates ambient light interference.

FURTHER READING

[Raman vs SERS... What's the Difference?](#)

REFERENCES

1. B. Sharma, R.R. Frontiera, A.I. Henry, E. Ringe, and R.P. Van Duyne, *Materials Today*, 2012, 15(1-2), 16-25.
2. S. Botti, S. Almaviva, L. Cantarini, A. Palucci, A. Puiu and A. Rufoloni, *J. Raman Spectroscopy*, 2013, 44, 463–468.

CONTACT

Metrohm France
13, avenue du Québec - CS
90038
91978 VILLEBON
COURTABOEUF CEDEX

info@metrohm.fr

CONFIGURATION



Spectromètre Raman portable i-Raman Plus 785S

L'i-Raman® Plus - 785S appartient à notre série primée de spectromètres Raman portables « i-Raman », équipée de notre technologie de spectrométrie intelligente et innovante. Faisant appel à un détecteur à barrette CCD à haute efficacité quantique, avec refroidissement thermoélectrique et une gamme dynamique élevée, ce spectromètre Raman portable fournit des performances exceptionnelles avec un bruit réduit, même avec un temps d'intégration atteignant 30 minutes. Ainsi, les signaux Raman faibles peuvent aussi être mesurés.

Le i-Raman Plus 785S offre la combinaison exclusive d'une large gamme spectrale et d'une haute résolution avec des configurations autorisant des mesures de 65 cm^{-1} à 3350 cm^{-1} . Le faible encombrement et la légèreté de structure de ce système peu énergivore lui permettent d'effectuer partout des analyses Raman de qualité recherche. Équipé d'une sonde à fibre optique pour faciliter l'échantillonnage, l'i-Raman Plus peut être utilisé avec un support de cuvette, un microscope vidéo, une table de translation XYZ avec support de sonde ainsi qu'avec notre logiciel d'analyse à variantes multiples BWIQ® et le logiciel d'identification BWID®. Avec le i-Raman Plus, vous avez une solution Raman pérenne de haute fidélité pour l'analyse qualitative et quantitative.



Système d'échantillonnage Raman avec vidéomicroscope (785 nm)

Système d'échantillonnage avec vidéomicroscope pour une utilisation avec les sondes Raman de B&W Tek en laboratoire ou dans l'industrie. Avec un objectif de grossissement x20 pour une distance de travail de 16 mm. Permet le réglage manuel grossier et fin sur les axes XYZ. Éclairage à LED coaxial pour une orientation sur la cible et caméra vidéo pour l'observation de l'échantillon, compatible avec les objectifs standard de microscope. La sonde n'est pas fournie, elle est disponible séparément. Configuration 785 nm.

BAC151C-785



Enveloppe pour le système d'échantillonnage Raman

Enveloppe pour le système d'échantillonnage Raman (microscope et support d'électrode) pour protéger les yeux et/ou la peau des émissions laser directes. Le boîtier est de forme ergonomique afin de faciliter l'utilisation de la sonde et la commande du système. Pour une utilisation avec des longueurs d'onde de 532 nm, 785 nm et 1 064 nm.



Porte-cuve Raman pour sonde de mesure de 9,5 mm

Le porte-cuve Raman BCR100A vous permet de mesurer facilement le spectre Raman de liquides et de poudres en fixant une sonde Raman au support. Cet accessoire utilise un miroir intérieur doté d'un obturateur de précision à trois points pour une reproductibilité inégalée et amplifie le signal Raman jusqu'à trois fois plus que les porte-cuves classiques. Il est conçu pour que la tige de la sonde n'entre pas directement en contact avec la cuve et comporte un piège à lumière pour réduire la fluorescence de fond. Le BCR100A est disponible en modèles pour sondes de 9,5 mm ou 12 mm de diamètre et peut être utilisé pour le prélèvement dans des liquides ou des poudres avec tout type de cuve standard de 12,5 mm x 12,5 mm de diamètre extérieur (course de 1 cm).