



Application Note AN-C-193

Alkyl amines in scrubber solutions

Determination of ethanolamines and methylamines besides inorganic cations for process monitoring

Scrubber solutions often contain mixtures of alkyl amines. These substances neutralize acidic harmful gases such as H_2S and CO_2 , and remove them from industrial processes, which is known as «gas sweetening». In many industrial processes such as in oil refineries or natural gas production, this gas scrubbing treatment is crucial to inhibit corrosion and damage to piping and equipment from acidic gases. Additionally, such matrices are often very complex and can contain inorganic cations in higher concentrations as heat stable salts. Beside their use as corrosion inhibitors, ethanolamines and methylamines are used as raw materials for

various production processes, e.g., detergents, emulsifiers, polishes, or for pharmaceuticals and chemical intermediates. Ion chromatography provides an effective means to monitor such processes. Good peak resolution and the separation of amines from inorganic cations is required. The high-capacity Metrosep C 6 column provides excellent conditions: narrow peaks as well as high flexibility in eluent compositions. This Application Note shows the method development for analysis of ethanolamines, methylamines, and common inorganic cations.

BACKGROUND

Harmful acidic gases form weak acids when transferred into an aqueous medium. They can react with weak bases, like ethanolamines in scrubber solutions, and transform into inert salts. Adding the appropriate amount of amines will neutralize the solution. In order to hold the pH

value in an optimal range, a tight control of the chemical composition is necessary. Ion chromatography with conductivity detection provides an effective means to monitor this process and to control amine addition.

EXPERIMENTAL

The determination of cations and amines is performed as a non-suppressed analysis with a 940 Professional IC at 30 ° C.

A mixture of nitric acid, dipicolinic acid, and acetone serves as mobile phase. Samples are injected with a 20 µL injection volume. Separation takes place on a Metrosep C 6 -

150/4.0 column equipped with a Metrosep RP 2 Guard/3.5. The conductivity signal is recorded and quantified with the MagIC Net software.

Column temperatures, flow rates, and eluent composition were varied to find an optimal peak resolution within the shortest possible analysis time (Table 1).

Table 1. Adjustments during method development to shorten run time and to increase peak resolution.

Parameter	Effect
Temperature increase	Shorter retention times, especially for alkaline earth metals
Flow rate increase	Faster elution with sharper peaks, with separation quality unchanged
Dipicolinic acid modifier	Divalent cations accelerate, magnesium and calcium change elution order
Acetone modifier	Improved resolution of amines

RESULTS

Ethanolamines and methylamines are well separated from various alkali and alkaline earth metal cations in less than 25 minutes (resolutions above 1.6 with 10 mg/L of each analyte) (Fig. 1).

The good resolution of sodium and ammonium (resolution greater than 3.1) allows their precise quantification beside the amines, even when one of the components occurs in great excess.

Thanks to the high capacity of the Metrosep C 6 - 150/4.0, larger volumes can also be injected

without compromising the peak shapes. The column length allows the determination of these multiple compounds in a reasonable time of less than 25 minutes. In case of higher concentrations, resolution can be maintained by increasing the column length to a 250 mm column. Additionally, Inline Dilution can be used for automation of the dilution procedure to guarantee a proper resolution and quantification of all peaks.

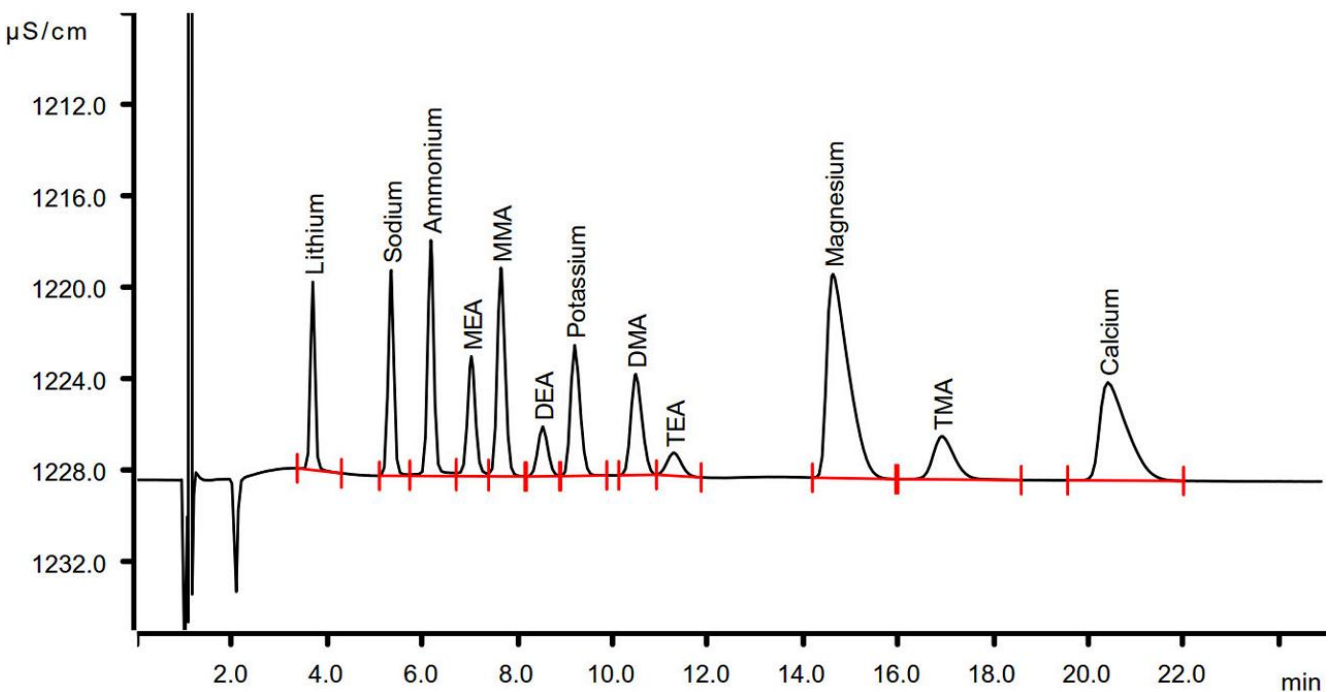


Figure 1. Determination of mono-, di-, and trimethylamine (MMA, DMA, TMA respectively) as well as mono-, di-, and triethanolamine (MEA, DEA, TEA respectively) besides lithium, sodium, ammonium, potassium, magnesium, and calcium in a mixed solution with a concentration of 10 mg/L.

CONCLUSION

Non-suppressed cation analysis with direct conductivity detection is a straightforward and robust technique which can be used at laboratory scale but also for process analysis. The 2060 Ion Chromatograph from Metrohm Process Analytics is therefore a reliable, highly precise automated solution (Fig. 2). These robust instruments for online process monitoring and control can be connected to up to 20 process points. Thus a sequential analysis at multiple areas inside of a plant is possible. The application can be upgraded with further addons to further improve usability and automation:

- Dialysis or ultrafiltration as automated inline sample preparation techniques.

- MiPT for optimal injection volume, to cover a larger concentration range and to perform automatic calibration.
- Suppressed cations analysis for very low concentrations, to achieve an even better signal-to noise ratio.
- Mass spectrometry as a second independent detector in series after the conductivity detector to improve detection limits and confirm peak identity.



Figure 2. Ion chromatographs for laboratories (left) and for process analytics (right).

Internal reference: AW IC CH6-1210-102014

CONTACT

メトロームジャパン株式会社
143-0006 東京都大田区平
和島6-1-1
null 東京流通センター アネ
ックス9階

metrohm.jp@metrohm.jp

CONFIGURATION




930 Compact IC Flex Oven/Deg

930 コンパクト IC Flex Oven/Deg はカラムオーブンと内蔵式脱気装置を備えたサフレッションの無いインテリシエントコンパクトIC装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することかてきます。

典型的な使用領域:

- 電気伝導度検出器によるサフレッション無しの陰イオンおよび陽イオンの測定
- UV/VIS検出器またはアンヘロメトリック検出器によるシンプルな使用

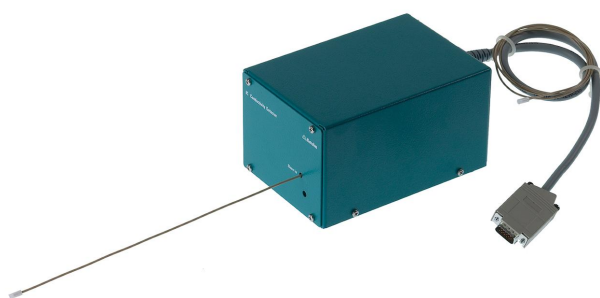

IC Conductivity Detector

インテリシエントIC装置のためのコンパクトかつインテリシエントな高出力電気伝導度検出器。優れた温度安定性、保護された検出器フロックス内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は(自動のものも含めて)必要ありません。



Metrosep C 6 - 150/4.0

C 6 の材料の容量が大きいため、分離カラム Metrosep C 6 - 150/4.0 は、妥当な保持時間の場合、濃度差の大きな標準陽イオンを分離するのに最も適したソリューションです。アンモニウム含有量の少ない飲料水は、このカラムで測定することかてきます。



858 Professional Sample Processor – Pump

858 フロフェッショナルサンプルプロセッサ - ホンプは、500 μ Lから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのヘリスタリックホンプまたは800 トシーノ電動ヒュレットによって転送されます。



Liquid Handling Station

Swing Head 付きサンプルチェンジャー用の洗浄ステーションと希釈ステーションの組み合わせ。タワーの右側から取り付けます。



MagIC Net 4.0 Professional: 1

すべてのインテリジェントなProfessional ICシステム、コンパクトなIC装置とそれらの周辺機器、すべての検出器と様々なオートサンフラー、800 Dosino、771 Compact InterfaceなどのコントロールのためのプロフェッショナルなPCプログラム。このソフトウェアにより、イオンクロマトグラフィー分析のチェック、データ記録、評価・モニタリングとレポートの作成が可能となります。

ルーチンオペレーションのためのグラフィック ユーザーインターフェース、広範なデータヘース プログラム、メソッド開発、コンフィグレーションならびに手動のシステム制御; 非常にフレキシブルなユーザー管理、高性能なデータヘース オペレーション、広範なデータエクスポート機能、独自設定可能なレポート作成機能、全システム コンホーネットおよびクロマトグラフィー結果のコントロールおよびモニタリング。

MagIC Net ProfessionalはFDA規定21 CFR Part 11およびGLPに完全に準拠しています。

MagIC Net は16のタイアロク言語で使用可能です: ドイツ語、英語、中国語 (繁体、簡体)、フランス語、イタリア語、スペイン語、ホルトカル語、フルカリア語、チェコ語、ハンカリー語、日本語、韓国語、ロシア語、スロハキア語、ホーランド語

1ライセンス

インストールファイルと文書は 1 つの USB スティックに保存され、納品されます。