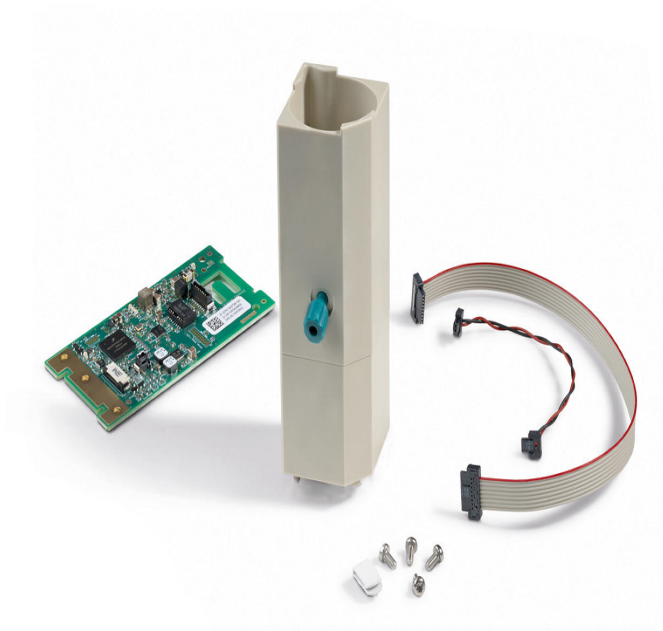




Kit de poste de dilution

6.05801.250

Le poste de dilution sert à diluer automatiquement les échantillons. Une OMNIS Dosing Drive Unit mesure précisément une quantité définie d'échantillon concentré. L'échantillon concentré est transféré dans le récipient de dilution avec le volume nécessaire de solution de dilution. L'agitateur magnétique intégré homogénéise le mélange d'échantillon concentré et de solution de dilution. L'échantillon dilué est ensuite acheminé vers le trajet de circulation d'échantillons par la sortie de l'échantillon.

Metrohm recommande l'utilisation du barreau d'agitation suivant :

– Barreau d'agitation / 8 x 3 mm (6.1903.000)

Le poste de dilution est équipé d'un trop-plein. Le liquide du trop-plein est recueilli dans le récupérateur de gouttes, s'écoule de là vers le détecteur de fuites, avant d'être acheminé vers le système de tuyaux d'écoulement.

1 seul poste de dilution peut être installé par passeur d'échantillons. S'il est encrassé, le récipient de dilution peut être nettoyé ou remplacé.

Remarque : cette mise à niveau doit être installée par un technicien service Metrohm local agréé.

Accessoires optionnels

6.1903.000

**Barreau d'agitation /
8 x 3 mm**

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE,
longueur 8 mm et diamètre 3 mm.

