



# Metrohm TacticID- 1064 ST

Plus de rapidité et de fiabilité  
sur les identifications  
chimiques sur le terrain

DES EXPERTS  
DE CONFIANCE

 **Metrohm**

# Efficacité optimale

## Donnez à votre équipe les moyens d'en faire plus

La taille compacte et le design ergonomique du Metrohm TacticID-1064 ST maximisent son efficacité afin d'optimiser les ressources en personnel et en équipement. Ce système Raman portable de pointe allie portabilité et facilité d'utilisation pour fournir des réponses rapides sur le terrain. Le TacticID-1064 ST est conçu pour vous permettre d'aller de l'avant, même dans les situations les plus exigeantes.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité de mesure au travers les contenants opaques à 1064 nm
- Sonde d'immersion
- Logiciel HazMasterG3
- Utilisation à une seule main
- Bibliothèques spectrales intenses et de haute qualité
- Boutons et écran tactile
- Accessoires « intelligents »



**VOIR LE TacticID-1064 ST EN ACTION**

### BATTERIES ÉCHANGEABLES

Les batteries interchangeables minimisent les temps d'arrêt et préservent votre flux de travail. Faites l'expérience d'un outil de confiance qui rend chaque opération plus facile. Le TacticID-1064 ST est un partenaire fiable qui vous suit, quel que soit l'environnement.

### ERGONOMIE

Le TacticID-1064 ST vous apporte des résultats de la qualité d'un laboratoire dans le creux de votre main. Une ergonomie bien conçue qui permet aux opérateurs d'effectuer des tâches de manière efficace, tant sur le terrain qu'en laboratoire. Sa forme compacte augmente l'efficacité globale grâce à un confort accru, un déploiement rapide et une manipulation intuitive.

# N'importe quel échantillon, n'importe où



**VOIR NOS ACCESSOIRES  
D'ÉCHANTILLONNAGE  
EN ACTION**



## Identification inégalée des produits chimiques dans n'importe quel environne- ment

Les révolutions technologiques se produisent lorsque vous pouvez mesurer ce que d'autres ne peuvent pas. Avec le TacticID-1064 ST, vous pouvez explorer et analyser en toute sécurité et sans limite. Le TacticID-1064 ST est le premier système Raman 1064 nm capable de réaliser des analyses au travers des contenants opaques, ce qui permet aux utilisateurs d'identifier le contenu de récipients sans les ouvrir. Cette capacité profite à de nombreuses applications, de l'identification des matières dangereuses au contrôle de la qualité dans la fabrication.

## Accessoires ST intelligent pour une sécurité accrue

Le TacticID-1064 ST permet d'analyser des échantillons à travers les emballages des fabricants tels que le papier, les couches multiples de matériaux mixtes et les matériaux très colorés comme le nylon et le verre ambré. L'appareil reconnaît automatiquement les accessoires intelligents qui peuvent être échangés rapidement pour différents types de contenants.

### ACCESSOIRE ST

Grande taille de spot et profondeur d'échantillonnage pour mesurer au travers les contenants les plus difficiles. Evite de brûler les échantillons de couleur foncée

### ACCESSOIRE GÉNÉRAL

Accessoire de type "point and shoot" pour les systèmes TacticID.

### ACCESSOIRE POLYSTYRENE

Standard ASTM à base de Polystyrène pour l'étalonnage des instruments.

### ACCESSOIRE POUR LONGUE DISTANCE DE TRAVAIL

Accessoire de mesure avec une longue distance de travail avec un adaptateur pour bouteille.

### ACCESSOIRE POUR COURTE DISTANCE DE TRAVAIL

Accessoire de mesure avec une courte distance de travail pour les systèmes TacticID.

### ACCESSOIRE À ANGLE DROIT



Facilite l'analyse d'un échantillon posé sur une surface plane.

### SONDE D'IMMERSION

Effectue des mesures en contact sur des solides ou des liquides.

### SUPPORT POUR VIAL

Tester en toute sécurité des échantillons dans des vials jetables.

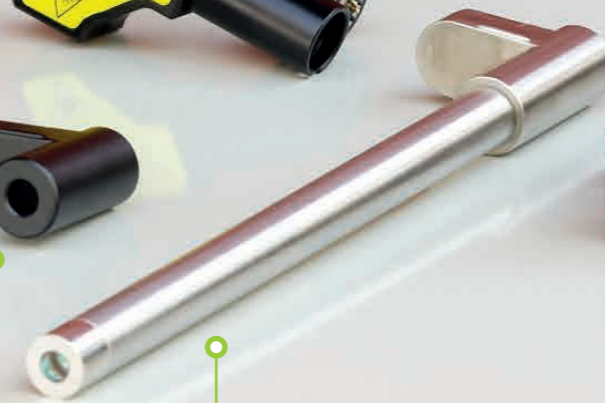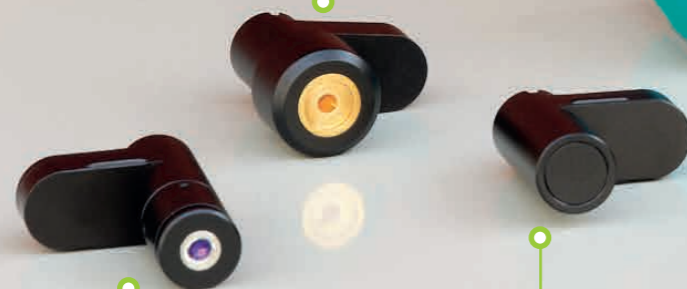

# La précision – quand ça compte

## Prenez des décisions plus rapides en toute confiance !

Le TacticID-1064 ST de Metrohm redéfinit l'analyse chimique avec des résultats rapides comme l'éclair. Ses vastes bibliothèques Raman spécialisées vous permettent d'identifier un large spectre de produits chimiques avec une précision inégalée. Trouvez rapidement les menaces cachées à l'intérieur des contenants et des emballages. L'efficacité et la précision du TacticID-1064 ST garantissent des données fiables très rapidement, qu'il s'agisse de contrôles de qualité de routine ou de situation sous haute tension.



**DÉCOUVREZ LA  
PUISSANCE DU  
TacticID-1064 ST**



### CONFIANCE SOUS PRESSION

Lorsque les enjeux sont importants, il est primordial d'être certain de prendre la bonne décision. Le TacticID-1064 ST offre la précision et la rapidité dont vous avez besoin pour agir avec certitude, à chaque fois.

### BIBLIOTHÈQUE COMPLÈTE

Le TacticID-1064 ST utilise la bibliothèque Raman la plus complète disponible chez un fabricant d'instruments, avec plus de 26 000 composés. Des sous-bibliothèques permettent une identification souple et rapide pour les primo intervenants, les chimistes industriels, les services de contrôle de la qualité et d'autres professionnels.

### PRISE DE DÉCISION AMÉLIORÉE

Faites confiance au TacticID-1064 ST pour obtenir des résultats clairs et précis dans les situations les plus délicates. Dans ces moments critiques, vous avez besoin d'un partenaire qui vous aide à prendre les bonnes décisions rapidement et avec précision, vous donnant ainsi la tranquillité d'esprit et le contrôle.

### LOGICIEL HAZMASTERG3

Sur le terrain, vous avez besoin d'une identification complète des substances. Reliez instantanément sur l'appareil vos données au logiciel éprouvé HazMasterG3 pour obtenir des informations supplémentaires et vitales sur la substance à laquelle vous êtes confronté. Prenez des mesures immédiates sans perdre un temps précieux.

## PACKS DISPONIBLES

<b>29530020</b>	<b>Pack avancé TacticID-1064 ST</b>
	Comprend les accessoires intelligents suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>- Mesure au travers ST</li><li>- Courte distance de travail</li><li>- Porte-vial</li><li>- Longue distance de travail</li><li>- Général</li><li>- Angle droit</li><li>- Polystyrène</li><li>- Sonde à immersion</li></ul>
Comprend également :	2ème batterie supplémentaire Lithium-ion, bloc d'alimentation avec adaptateurs international et de voiture, mallette de transport de la série TacticID, pochettes pour accessoires, lunettes laser 1064 nm, câble USB-C vers USB-A, dragonne.
<b>29530010</b>	<b>Pack de base TacticID-1064 ST</b>
	Comprend les accessoires intelligentes suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>- Mesure au travers ST</li><li>- Général</li><li>- Polystyrène</li></ul>
<b>Bibliothèques construites par Metrohm pour les Raman Metrohm</b>	
66079000	Bibliothèque Raman complète Metrohm
66079010	Bibliothèque Raman Metrohm Produits chimiques illicites et généraux
66079070	Bibliothèque des explosifs
66079080	Bibliothèque des armes chimique de guerre CWA