



# 900 Touch Control

Nie war Titrieren so einfach

PEOPLE  
YOU  
CAN  
TRUST

 **Metrohm**

# Mit einem «Touch» titrieren

Leistungsstark wie ein PC, kleiner als ein Netbook und ein brillantes Farbdisplay – das ist der 900 Touch Control. Dieses Bedienmodul macht die Titration im Routinebetrieb einfacher, sicherer und schneller als je zuvor. Das sind die wichtigsten Funktionen und die Vorteile:

## USB-SCHNITTSTELLE

USB-Schnittstelle für Anschluss eines lokalen Druckers, einer Tastatur oder einer Maus. Methoden und Bestimmungsdaten können Sie direkt auf einem USB Memory Stick ablegen und bei Bedarf wieder in den 900 Touch Control einlesen.

## METHODEN-SCHNELLSTART

Verknüpfen Sie bis zu 14 Methoden mit einem Favoriten-Icon auf dem Start-Bildschirm. Ihre Standardmethoden sind sofort präsent und starten mit einer einzigen Berührung des Touchscreens. Einfacher geht nicht.



## NORMKONFORMITÄT

Der 900 Touch Control erfüllt die FDA-Verordnung 21 CFR, Part 11. Damit sind Sie bei Audits immer auf der sicheren Seite.

## ETHERNET UND LIMS

Ethernet-Schnittstelle für Zugang zum Intranet. Druck von Reports auf einem Netzwerkdrucker oder Speicherung auf einem Netzwerkspeicher. Methodenarchivierung und Transfer von Bestimmungsdaten direkt in Ihr LIMS.

## MEHRSPRACHIGER DIALOG


Ni Hao! Neben den Standardsprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch bieten wir auch die Dialogsprachen Chinesisch, Japanisch und Russisch.

## AUTOMATISCHER ELEKTRODENTEST

Fehlerhafte Elektroden werden sofort erkannt. Die Verlässlichkeit und Reproduzierbarkeit Ihrer Resultate ist damit garantiert.

## AUTOSTART

Probe ins Titrationsgefäß eingespritzt, aber vergessen zuvor die Titration zu starten? Die Messung muss wiederholt werden. Mit dem 900 Touch Control und dem Titrando passiert das nicht mehr. Das Gerät startet die Titration automatisch, sobald Probe zugegeben wird.

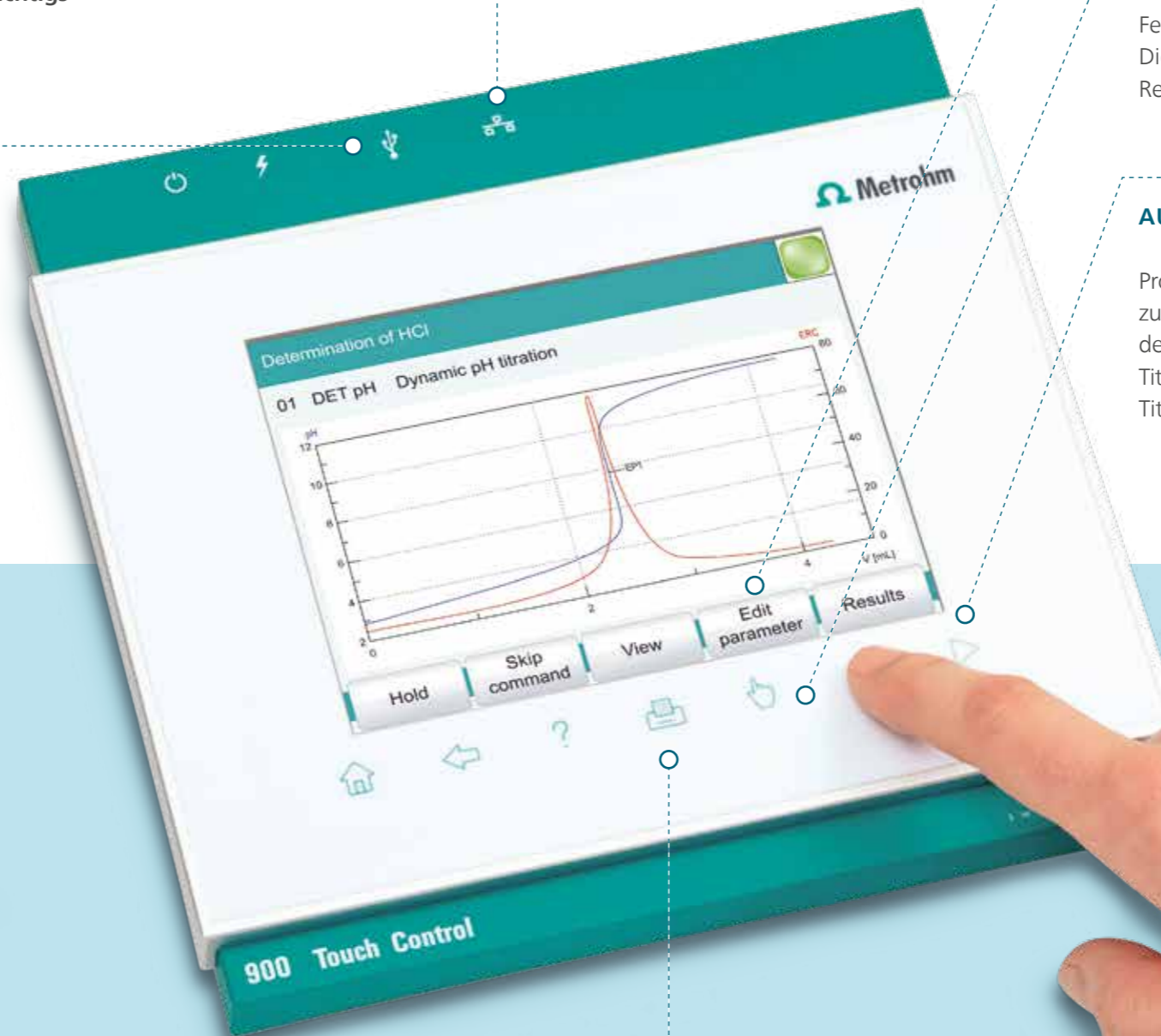

## PDF-GENERATOR

Ohne PC generieren Sie fälschungssichere PDF-Reports, die Sie direkt ausdrucken, auf einem Netzlaufwerk oder einem USB Memory Stick ablegen können.

## BESTELLINFORMATIONEN

### Instrument

2.900.0010      900 Touch Control

### Der 900 Touch Control ist kompatibel zu:

808, 809, 835, 836, 841, 842, 851, 852, 857, 888, 890, 901, 902, 904, 905, 906, 907 Titrandos

---

846 Dosing Interface

---

856 Conductivity Module

---

867 pH Module

---

814 USB Sample Processor

---

815 Robotic USB Sample Processor

---

815 Robotic Soliprep

---

855 Robotic Titrosampler

---

855 Robotic Analyzers

---

885 Compact Oven Sample Processor

---