

Release Notes tiamo 2.5 Patch 1

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Unterschiede zwischen der neuen Softwareversion **tiamo 2.5 Patch 1 (Build 116-1)** und der Vorgängerversion **tiamo 2.5 (Build 116)**.

2 Neue Features

Neue Geräte-Firmware

- Neue Firmware-Version für das Gerät 851 Titrand: 5.851.0013
- Neue Firmware-Version für das Gerät 852 Titrand: 5.852.0013

3 Behobene Fehler und Probleme


Programmteil Konfiguration

Wenn in **tiamo 2.5 light** in den **Sicherheitseinstellungen** unter **Anmeldung/Passwortschutz** die Checkbox **Anwendername erforderlich** aktiviert wurde und anschliessend die Schaltfläche **[OK]** gedrückt wurde, führte dies zu einem Programmabsturz.

4 Compliance

Die aktuelle Softwareversion enthält keine Änderungen, welche die Konformität von **tiamo** in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP beeinflussen.

Herisau, 19.05.2017

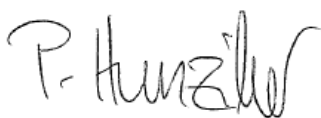

P. Hunziker

Vizedirektor, Leiter Entwicklung



Dr. M. Saba

Leiterin Qualitätsmanagement