



瑞士万通 TacticID-1064 ST 手持式拉曼光谱仪

现场快速鉴定化学物质

PEOPLE
YOU
CAN
TRUST

 **Metrohm**
瑞士万通中国

简单易用 轻松上手

让您的团队做得更多

瑞士万通 TacticID-1064 ST 便携小巧，符合人体工程学设计，可大大提升操作人员使用效率。该设备结合了便携性和易用性，可在作业现场快速给出结果。TacticID-1064 ST 旨在让您在苛刻的作业环境下，也能继续前进。

主要特点

- 1064nm 穿透式激光系统
- HazMasterG3 专业软件
- 可单手操作
- 大型拉曼数据库
- 高清触控屏
- 智能附件
- 浸入式探头

可更换电池设计

TacticID-1064 ST 配备可更换电池，可大幅度减少停机时间可随时投入使用，让每次执行任务都变得简单轻松。TacticID-1064 ST 是一个可靠的合作伙伴，无论多么严苛的环境，它都能与您保持同步，给予有力支持。

人体工学设计

TacticID-1064 ST 将实验室级检测能力放在您的掌中。精心设计的操作系统使操作员能够在现场和实验室环境中有效地执行任务。精巧的外形尺寸提高了舒适性和操控性，大大提升了整体工作效率。

随时随地 即刻出发

无论何种工作环境都能准确识别

通过智能透射镜头提升工作效率与安全性

突破环境限制。使用 TacticID-1064 ST，您可以不受限制地采样和分析。TacticID-1064 ST 是一款具备透视功能的 1064nm 波长拉曼系统，无需打开容器即可识别其中的物质。该功能扩大了拉曼光谱仪的应用范围，从危险品识别到质量控制皆可使用。

TacticID-1064 ST 可透过塑料包装、纸张、多层混合材料以及尼龙和茶色玻璃等材料进行分析。该设备可自动识别采样附件，便于快速更换采样附件以应对不同样品。



透射镜头

大尺寸光斑，可有效防止深色样品自燃；还可穿透包材，实现透射采样



通用镜头

焦距为 6mm 的标准采样镜头

聚苯乙烯校验帽

符合 ASTM 标准的校准附件

长焦镜头

焦距为 8mm 的长距离采样镜头




短焦镜头

焦距为 1mm 的近距离采样镜头



直角镜头

便于在平面物体上直接测量

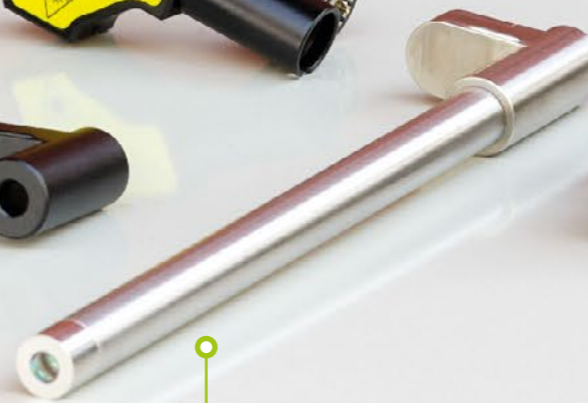

浸入式探头

长度达 8 英寸，可直接与固体或液体样品接触测量



小瓶支架

用于取样检测样品

准确 至关重要

充满自信的快速决策！

瑞士万通 TactiD-1064 ST 以闪电般的快速定性重新定义了化学分析。其大型专业数据库使您能够以出色的准确度识别各种化学品。快速发现隐藏在容器和包装中的威胁。TactiD-1064 ST 让您从常规产品检测到危险物质确认都能获得高效和可靠的结果。



应对高风险

当遇到高风险问题时，您需要知道如何做出正确的决定。TactiD-1064 ST 提供的分析准确性和测试速度，确保您每次都能正确地采取行动。

综合数据库

TactiD-1064 ST 拥有大型拉曼数据库，包含超过26000种化合物光谱。各种子库为现场负责人、化工厂安全员、质量控制部门和其他专业人员提供灵活快速的识别。

增强决策能力

TactiD-1064 ST 在重要的时刻为您提供准确可靠的结果。在关键时刻，您需要一个可信赖合作伙伴，帮助您快速准确地做出正确的决定，给予您信心。

HAZMASTERG3 软件

在现场，您需要对未知物质进行快速识别。通过仪器内置的 HazMasterG3 软件，您可以获得所面临物质的重要信息。立即采取应对行动，节省宝贵的时间。

可选配置

29530020	TacticID-1064 ST 高级套装
	包含以下配件： <ul style="list-style-type: none">- 透射镜头- 短焦镜头- 小管支架- 长焦镜头- 通用镜头- 直角镜头- 聚苯乙烯校验帽- 浸入式探头
同时包含：	“锂电池，电源适配器，TacticID 系列 手提箱、配件包、1064nm 激光护目镜、USB-C 转 USB-A 数据线、腕带。”
29530010	TacticID-1064 ST 基础套装
	包含以下配件： <ul style="list-style-type: none">- 透射镜头- 通用镜头- 聚苯乙烯校验帽
瑞士万通拉曼光谱库	
66079000	拉曼综合数据库
66079010	非法和一般化学品数据库
66079070 *	爆炸物数据库
66079080 *	化学战剂数据库

* 数据库需申请出口许可证

