

Application Note AN-NIR-143

Semola and semolina quality control using NIR spectroscopy

Nondestructive analysis of protein, moisture, gluten, and more in semolina-based products

Good pasta products start with good ingredients—including flour. Semola and semolina are special types of flour made from durum wheat, known for giving the resulting pasta a firm texture, bright yellow color, and superior cooking character. The difference is that semola is coarse (milled once) and semolina is exceptionally fine (milled twice). To make high-quality pasta, it is important to check key properties of these flours, like protein, moisture, ash content, gluten, and water absorption. This Application Note shows how monitoring these parameters with near-infrared spectroscopy (NIRS) can help pasta manufacturers quickly detect the best semola and semolina to keep their products consistent, tasty, and of high quality.

EXPERIMENTAL EQUIPMENT

Samples of semola and semolina flours were analyzed using an OMNIS NIR Analyzer Solid (Figure 1). Measurements were carried out in reflection mode while using a large sample cup. To enhance representativeness, the samples were rotated during the measurement, allowing the device to capture spectral data from multiple regions of each flour. OMNIS Software was used for all data acquisition and prediction model development.



Figure 1. OMNIS NIR Analyzer Solid.

RESULT

The OMNIS NIR Analyzer was used to monitor the quality of semolina and semola flours, focusing on protein, moisture, ash, gluten content, and water absorption. Figure 2 shows an example of some semola spectra gathered by the OMNIS NIR Analyzer Solid.

For semolina, moisture showed the strongest performance (Figure 3), with low prediction errors and a high correlation between NIR predictions and laboratory reference values. Ash, protein, and gluten content (Figures 4–6) were also quantified with good accuracy.

For semola, protein content was predicted with excellent correlation to the reference data (Figure 7), while moisture, ash, gluten, and water absorption also showed reliable calibration performance (Table 1).

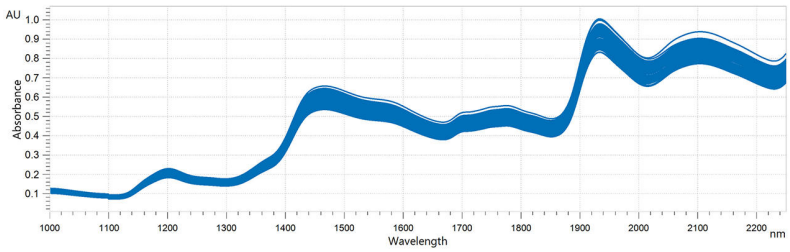


Figure 2. Near-infrared spectra of semola samples analyzed in reflection mode on an OMNIS NIR Analyzer Solid.

RESULT MOISTURE CONTENT IN SEMOLINA

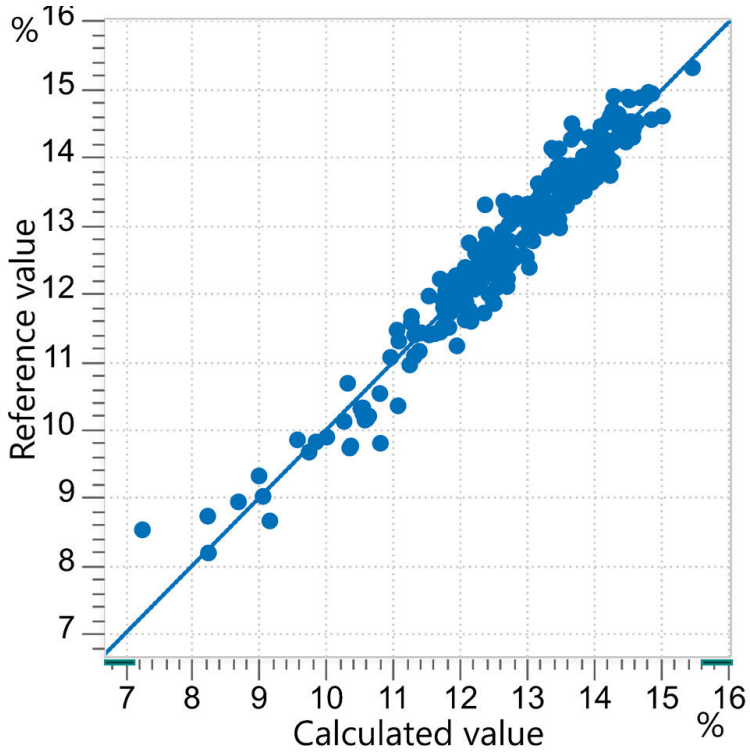


Figure 3. Correlation diagram and the respective figures of merit for the prediction of moisture in semolina measured with an OMNIS NIR Analyzer Solid.

R^2	SEC (%)	SECV (%)
0.949	0.29	0.31

RESULT PROTEIN CONTENT IN SEMOLINA

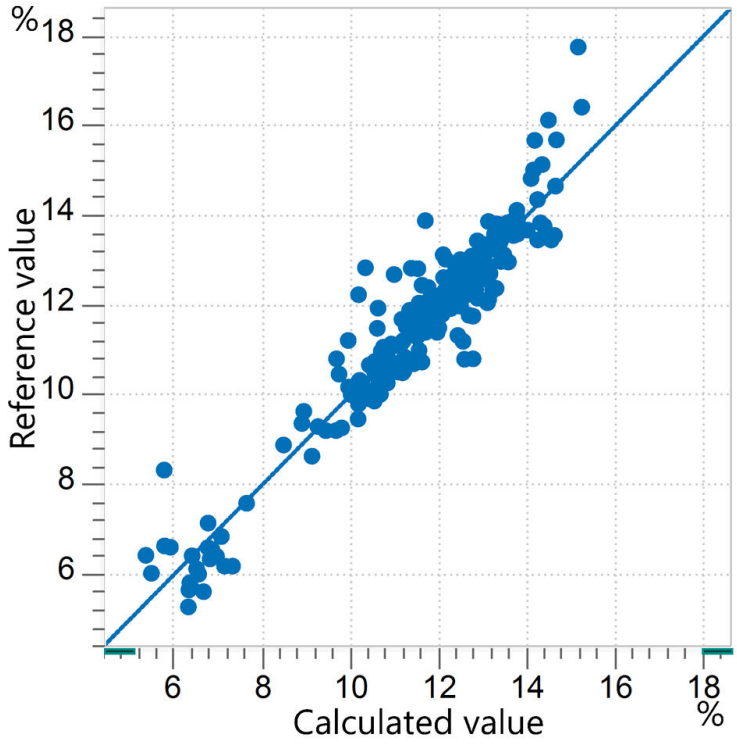


Figure 4. Correlation diagram and the respective figures of merit for the prediction of protein in semolina measured with an OMNIS NIR Analyzer Solid.

R^2	SEC (%)	SECV (%)
0.907	0.60	0.63

RESULT ASH CONTENT IN SEMOLINA

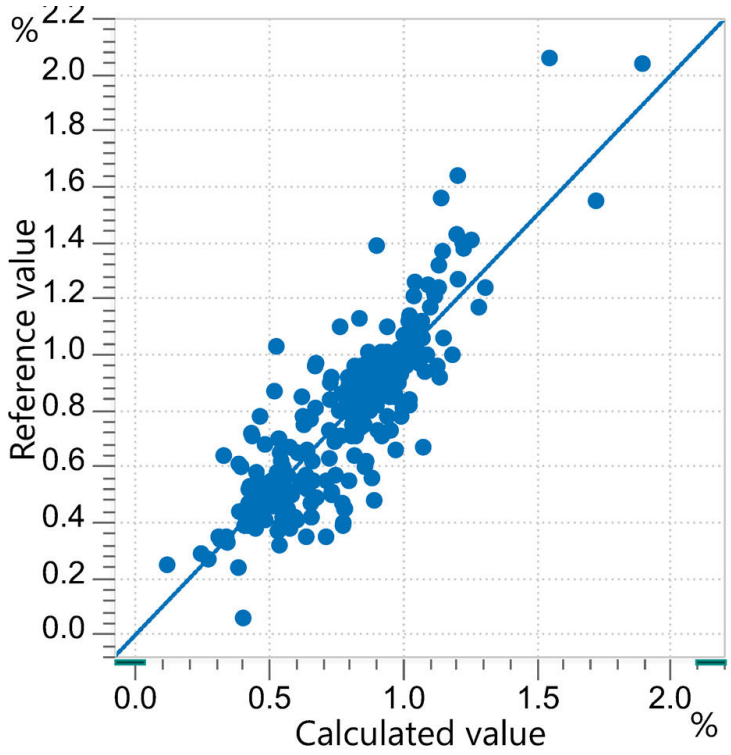


Figure 5. Correlation diagram and the respective figures of merit for the prediction of ash in semolina measured with an OMNIS NIR Analyzer Solid.

R^2	SEC (%)	SECV (%)
0.734	0.14	0.14

RESULT GLUTEN CONTENT IN SEMOLINA

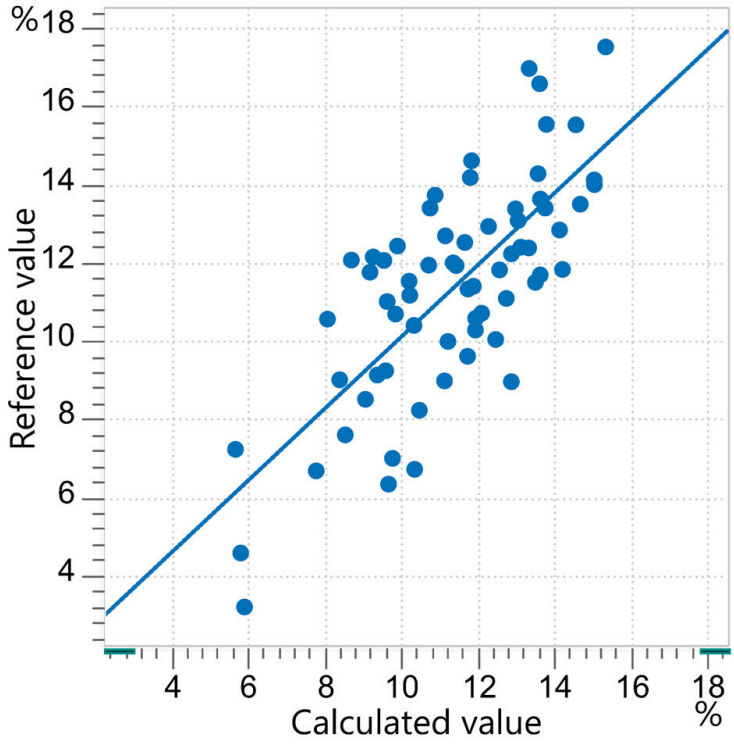


Figure 6. Correlation diagram and the respective figures of merit for the prediction of gluten in semolina measured with an OMNIS NIR Analyzer Solid.

R^2	SEC (%)	SECV (%)
0.550	1.71	1.87

RESULT PROTEIN CONTENT IN SEMOLA

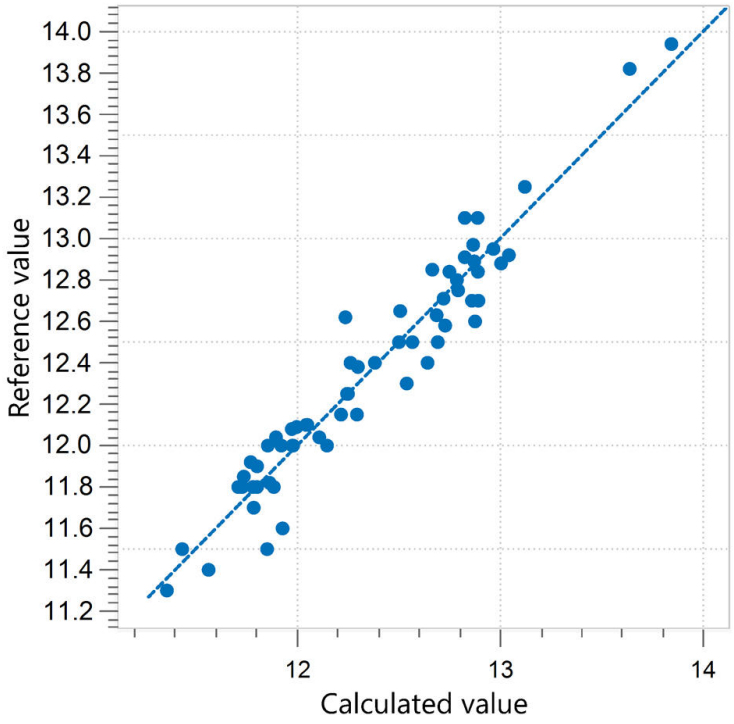


Figure 7. Correlation diagram and the respective figures of merit for the prediction of protein in semola measured with an OMNIS NIR Analyzer Solid.

R^2	SEC (%)	SECV (%)
0.933	0.14	0.14

Table 1. Figures of merit for the prediction of moisture, ash, protein, gluten, and water absorption in semola.

Parameter (range)	No. Spectra	SEC (%)	SECV (%)	R^2
Moisture (12.5–15.1%)	146	0.20	0.20	0.834
Ash (0.74–1.12%)	99	0.04	0.04	0.787
Gluten (23–32%)	43	0.67	0.81	0.815
Water absorption (53.7–58.8%)	37	0.37	0.44	0.82

CONCLUSION

This Application Note demonstrates the feasibility of using NIR spectroscopy to determine multiple key parameters in semolina and semola flours. As shown in Table 2, various traditional analytical methods are typically used for these measurements. However, NIR spectroscopy has proven to be a faster, simpler, and highly accurate alternative, offering excellent precision while streamlining the analysis process.

Table 2. Overview of the ISO norms used as a reference method for the different parameters measured in semola and semolina flours.

Parameter	Method
Protein	ISO 1871 – Kjeldahl method
Moisture	ISO 760 – Karl Fischer
Ash	ISO 2171 – Determination of ash content
Gluten	ISO 21415 – Methods for determining gluten
Water Absorption	ISO 5530-1 – Determination of water absorption using a farinograph

CONTACT

Metrohm France
13, avenue du Québec - CS 90038
91978 VILLEBON COURTABOEUF CEDEX
info@metrohm.fr

CONFIGURATION



OMNIS NIR Analyzer Solid

Spectromètre proche infrarouge pour échantillons solides et visqueux.

L'OMNIS NIR Analyzer est la solution de spectroscopie proche infrarouge (NIRS) développée et produite selon les normes de qualité suisses pour les analyses de routine tout au long de la chaine de fabrication. L'application des technologies les plus récentes et l'intégration dans le logiciel OMNIS moderne se reflètent dans la vitesse, la facilité du maniement et la flexibilité d'utilisation de ce spectromètre NIR.

Apercu des avantages de l'OMNIS NIR Analyzer Solid :

- Mesures d'échantillons solides et visqueux en moins de 10 secondes
- Mesures multi-positions automatisées pour des résultats reproductibles, même avec des échantillons non homogènes
- Intégration simple dans un système d'automatisation ou liaison avec d'autres technologies d'analyse (titrage)
- Prise en charge de nombreux récipients d'échantillon



Grand support OMNIS NIR, 100 mm

Grand support pour grand récipient d'échantillon OMNIS NIR, 100 mm (6.07402.110).

Permet un positionnement univoque du récipient d'échantillon et sa rotation.



Grande coupelle OMNIS NIR, 100 mm

Grand récipient d'échantillon pour l'enregistrement de spectres par réflexion de poudres et de granulés en différents points de l'échantillon.

Le fond en verre est en Gorilla® Glass résistant.

Compatible avec:

- Grand support OMNIS NIR, 100 mm (6.07402.100)

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Licence OMNIS autonome

Elle permet l'exploitation autonome du logiciel OMNIS sur un ordinateur WindowsTM.

Caractéristiques :

- La licence comprend déjà une licence pour appareils OMNIS.
- Elle doit être activée via le portail d'octroi de licences Metrohm.

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Licence logicielle Quant Development

Licence logicielle pour la création et l'édition de modèles de quantification dans une installation du logiciel OMNIS Stand-Alone.