



Eco IC

2.925.0020

Ionenchromatographie für alle! Der Eco IC ist der Einstieg in die Ionenchromatographie zu einem sehr erschwinglichen Preis. Das Gerät ist besonders geeignet für Wasseranalytik im Routinebetrieb und den Lehrbetrieb an Schulen und Universitäten. Im Lieferumfang sind der Leitfähigkeitsdetektor, das Metrohm Suppressor Module «MSM» und die Software enthalten. Spätere Automatisierung für bis zu 36 Proben und der Einsatz von Inline Ultrafiltration sind jederzeit möglich.

Lieferumfang 2.925.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.925.0020	Eco IC

Ionenchromatographie für alle! Der Eco IC der Einstieg in die Ionenchromatographie zu einem sehr erschwinglichen Preis. Das Gerät ist besonders geeignet für Wasseranalytik im Routinebetrieb und den Lehrbetrieb an Schulen und Universitäten. Im Lieferumfang sind der Leitfähigkeitsdetektor, das Metrohm Suppressor Module «MSM» und die Software enthalten. Spätere Automatisierung für bis zu 36 Proben und der Einsatz von der Einsatz der Inline Ultrafiltration sind jederzeit möglich.



Kompakter und intelligenter Hochleistungs-Leitfähigkeits-Detektor zu den intelligenten IC Geräten. Hervorragende Temperaturkonstanz, die gesamte Signalverarbeitung innerhalb des geschützten Detektorblocks und DSP – Digital Signal Processing – der letzten Generation garantieren höchste Präzision der Messung. Dank dem dynamischen Arbeitsbereich sind keine (auch nicht automatische) Bereichswechsel notwendig.



Für den Anschluss von Kapillaren 1/16 in. Einsatz bei MSM-Hilfslösungen und in der Metrohm Inline Probenvorbereitung.



Für Eluenten-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.



Flasche für Hilfslösungen.





Zu Füllen mit Adsorbermaterial.



Kapillare zur Inline-Dialyse, für Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis.



Kapillare für das Probenhandling in der IC.



1 STK

6.1807.010

Y-Verbinder für Schlauch ID 6-9 mm

Verbindungsstück für Abfallschläuche



2 STK

6.1816.020

Silikonschlauch 6 mm i.D. / 1 m

Für Ablaufschläuche




1 STK

6.1826.420

Pumpschlauch PharMed® (orange/gelb) 3 Stopper

Zur MSM-Regeneration mit Peristaltikpumpe.

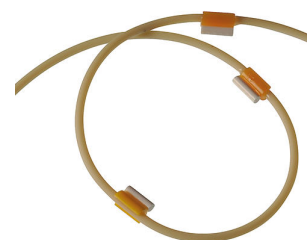

1 STK

6.1831.100

PEEK-Kapillare 0.25 mm i.D. / 1m



1 STK

6.2023.020

Schliffklammer NS 14/15

Schliffklammer für NS 14/15.



1 STK

6.2151.020

Kabel USB A - USB B / 1.8 m

USB-Verbindungskabel



1 STK

6.2251.000

Markierungshülsen zu Kapillaren

Farbige Schrumpfschlauchteile zur Markierung von Kapillaren. Je drei Stück von fünf verschiedenen Farben.



1 STK

6.2617.010

Werkzeug für Kolbendichtung

Zum Entfernen und Montieren der Kolbendichtung bei allen Standard-Pumpenköpfen



2 STK

6.2621.000

Rollgabelschlüssel

Maximale Öffnung: 20 mm. Für IC-Geräte



1 STK

6.2621.030

Inbusschlüssel 4 mm



1 STK

6.2621.050

Gabelschlüssel 1/4 in.

Für 1/4 in. Schrauben. Für IC-Geräte



1 STK

6.2621.080

Kapillarschneider

Schneidewerkzeug zum einfachen Schneiden von Kunststoffkapillaren, 1/16" und 1/8", inklusive 5 Ersatzklingen.



1 STK

6.2621.100

Inbusschlüssel 3 mm für IC Sample Processors



2 STK

6.2739.000

Schlüssel

Zum Anziehen von Verbindungen.



1 STK

6.2743.080

Verschlussstopfen für Überlauf, 5 Stück

Für Professional IC Geräte



1 STK

6.2744.014

Druckschraube 2x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.020

Kupplung Luer/UNF

Für IC-Geräte



1 STK

6.2744.035

Kupplung Olive/UNF 10/32, 1 x

Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 1 Stück. Für IC-Geräte mit Peristaltikpumpe.



3 STK

6.2744.040

Kupplung 2 x UNF 10/32

Für die Verbindung von 1/16 in. Kapillaren. Für IC-Geräte



2 STK

6.2744.070

Druckschraube kurz

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.180

Pumpschlauch-Verbindung mit Sicherung und Filter

Zur Verbindung von Pumpschlauch und Kapillare mit eingebautem Filter




1 STK

6.2744.210

Schlauchadapter für Ansaugfilter

Für IC-Geräte

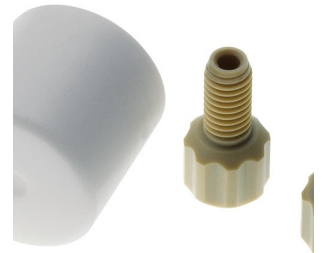

1 STK

6.2816.020

Spritze 10 mL mit Luer-Anschluss

Für verschiedene Anwendungen in IC und VA



1 STK

6.2816.040

Purge-Kanüle

Mit PTFE-Schlauch und Luer-Anschluss. Für Spritzen. Zum Ansaugen von Eluenten.



1 STK

6.2821.090

Ansaugfilter

Porengrösse 27 µm. Set à 5 Stück. Für Ansaugschlauch (6.1834.000, 6.01834.010) und Filterrohre (6.1821.040, 6.1821.050).




1 STK

6.2821.130

Ersatzfilter zu Inline-Filter

Ersatzfilter für Inline-Filter.

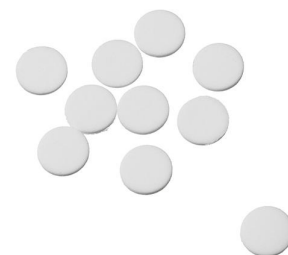

1 STK

6.2832.000

MSM Rotor A

Suppressor-Rotor für alle IC-Geräte mit MSM (Metrohm Suppressor Modul)



1 STK

6.2835.010

Anschlussstück zu MSM und SPM-Modul

Universelles Anschlussstück zum MSM in Professional IC Vario und Compact Flex Geräten, sowie für MSM-HC und SPM Modul. Mit Zu- und Ableitungen.



Mit Hilfe der Adapterhülse kann sowohl der MSM Rotor A wie auch der MSM-LC Rotor A im Rotorgehäuse installiert werden.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.01032.410	Metrosep A Supp 17 - 100/4.0	
	Die Metrosep A-Supp-17-Säulen sind Anionentrennsäulen für den Einsatz bei Raumtemperatur mit sehr gutem Preis/Leistungsverhältnis. Die Metrosep A Supp 17 - 100/4.0 ermöglicht die Trennung der Standardanionen in kurzer Zeit. Durch die hohe Flexibilität in der Flussrate (bis 1.8 mL/min) lassen sich, abhängig vom Trennproblem, sehr kurze Analysenzeiten erreichen.	
6.01032.420	Metrosep A Supp 17 - 150/4.0	
	Die Trennsäule Metrosep A Supp 17 - 150/4.0 ist die Säule der Wahl für Anionenbestimmungen, die eine gute Trennleistung und kurze Trennzeiten bei Raumtemperatur erfordern. Die maximale Flussrate von 1.4 mL/min bietet hierzu die Möglichkeit zur Optimierung der Bestimmung. Die Metrosep A-Supp-17-Säulen überzeugen durch ein gutes Preis/Leistungsverhältnis.	
6.01032.430	Metrosep A Supp 17 - 250/4.0	
	Die Metrosep A Supp 17 - 250/4.0 kombiniert eine hohe Trennleistung mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis und dies ohne dass ein Säulenofen benötigt wird. Das verwendete Grundmaterial Polystyrol /Divenylbenzol garantiert eine lange Lebensdauer der Säule. Auf dieser Säule lassen sich komplexe Trennaufgaben lösen.	
6.01032.500	Metrosep A Supp 17 Guard/4.0	
	Die Metrosep A Supp 17 Guard/4.0 schützt die analytischen Trennsäulen Metrosep A Supp 17 wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Die Guard-Säule zeichnet sich dank «On Column Guard System» durch sehr einfache Handhabung aus. Die Guardsäule wird einfach auf die analytische Säule geschraubt. Werkzeug wird hierfür nicht benötigt.	

Die Metrosep A Supp 17 S-Guard/4.0 schützt die analytischen Trennsäulen Metrosep A Supp 17 wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Die Guardsäule wird einfach mittels Kapillarverbindung mit der Trennsäule verbunden. Werkzeug wird hierfür nicht benötigt.



Upgrade Kit zum Nachrüsten des EcoIC mit einem Pulsationsdämpfer.



Zusätzlicher Flaschenhalter für Basic IC- und Eco IC-Geräte



Client/Server-fähige Chromatographie-Software von Metrohm für die Steuerung aller intelligenten Professional IC Systeme, Compact IC Geräte und ihrer Peripherie, aller Detektoren und den verschiedenen Autosamplern, 800 Dosino, 771 Compact Interface, etc.

Die Software erlaubt die Kontrolle, Datenaufnahme, -auswertung und -überwachung sowie Report-Erstellung von ionenchromatographischen Analysen.

Die Daten und Methoden werden zentral auf dem Server gespeichert.

Grafische Benutzeroberfläche für Routineoperationen, umfangreiche Datenbankprogramme, Methodenentwicklung, Konfiguration und manuelle Systemsteuerung; sehr flexible Benutzerverwaltung, leistungsfähige Datenbankoperationen, umfangreiche Datenexportfunktionen, individuell konfigurierbarer Reportgenerator, Steuerung und Überwachung sämtlicher Systemkomponenten und der Chromatographie-Resultate.

MagIC Net Multi erfüllt vollumfänglich die FDA-Vorschrift 21 CFR Part 11 wie auch GLP.

MagIC Net steht in 16 Dialogsprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Bulgarisch, Tschechisch, Ungarisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Slowakisch

Mit dieser Version wurde die grafische Benutzeroberfläche modernisiert was u.a. die Skalierung und Schärfe der Benutzeroberfläche auf 4K-Monitoren verbessert.

Die Performance für Client-Server Systeme mit Servern ausserhalb des Firmen-internen Netzwerkes wurde verbessert.

Client/Server Version mit 3 Lizenzen



2.948.0010

948 Continuous IC Module, CEP

Mit dem 948 Continuous IC Module werden Hydroxideluenten automatisiert hergestellt. Es können sowohl isokratische Eluenten hergestellt als auch Gradienten gefahren werden.

Das 948 Continuous IC Module, CEP besteht aus folgenden Bestandteilen:

- 948 Continuous IC Module
- Eluent Producer Cartridge (EPC, 6.02850.200)
- kontinuierliche Anion Trap (CT, 6.02850.100)
- Hochdruckdegasser (H-DEG, 6.02850.000)

Beispielmethoden gemäss Handbuch 948 Continuous IC Module.



6.2842.100

MSM-HC Rotor A, Hydroxid

Suppressor Rotor mit hoher Kapazität für Hydroxid-Eluenten für alle IC Geräte mit MSM-HC (Metrohm Suppressor Modul mit hoher Kapazität).

