



i-Raman Plus 785S

29550030

Das i-Raman Plus 785S ist ein hochauflösendes, forschungstaugliches Raman-Spektrometer, das für Präzision und Vielseitigkeit in einer kompakten, tragbaren Form entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem 785-nm-Laser und einem breiten Spektralbereich von 65 bis 3350 cm^{-1} bietet es eine hervorragende Leistung sowohl für qualitative als auch für quantitative Analysen. Sein TE-gekühlter CCD-Detektor sorgt für rauscharme Messungen – auch bei längeren Integrationszeiten – und damit ist es ideal für die Erfassung schwacher Raman-Signale in Anwendungen wie der Kunstkonservierung, Mineralogie und SERS.

Das System unterstützt die flexible Probennahme mit einer faseroptischen Sonde und Zubehör wie einem Küvettenhalter, einem Videomikroskop und einem XYZ-Verschietisch. Unterstützt von der SpecSuite Software bietet das 785S eine fortschrittliche Datenanalyse und Spektrenidentifizierung.

Das i-Raman Plus 785S ist die ideale Wahl für Teams, die zuverlässige Raman-Analysen über einen breiten Spektralbereich in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen benötigen, von der Laborforschung bis zur Feldforschung.

Erfahren Sie, wie das i-Raman Plus forschungstaugliche Raman-Spektroskopie in einem handlichen Paket bietet:

- Breiter Spektralbereich und Spektrometer-Konfigurationen für hohe Auflösungen.
- Die kleine Grundfläche des Systems, die leichte Bauweise und der geringe Energieverbrauch sorgen überall für die Möglichkeit, Raman-Analysen auf Forschungsniveau durchzuführen.
- Das i-Raman Plus ist mit einer faseroptischen Sonde zur leichten Probennahme ausgestattet und kann mit einem Küvettenhalter, einem Videomikroskop oder einem XYZ-Verschiebetisch mit Sondenhalter verwendet werden.
- Das i-Raman Plus wird von der leistungsstarken SpecSuite Software für die einfache Erfassung von Raman-Daten sowie die quantitative Modellentwicklung, die Identifizierung mit Spektrenbibliotheken und die Routineanalytik unterstützt.

Lieferumfang 29550030

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	607510040	Validierungskappe aus Polystyrol
		Validierungskappe mit eingebautem Polystyrol-Standard für Raman-Sonden in Laborqualität mit einem Schaftdurchmesser von 9.5 mm.
		
1 STK	607510050	Laserschlüssel für i-Raman-Serie
		Laserschlüssel für die Systeme i-Raman NxG, i-Raman Duo und i-Raman Plus.
		
1 STK	607510010	Verriegelungsstecker für i-Raman-Serie
		Verriegelungsstecker für die Systeme i-Raman NxG, i-Raman Duo und i-Raman Plus.
		

1 STK

607510000

Netzteil für i-Raman-Serie

Netzteil mit 12 V und 6,6 A für die Systeme i-Raman NxG, i-Raman Duo und i-Raman Plus.



1 STK

607510060

AC-Netzkabel für i-Raman-Serie

AC-Netzkabel für die Systeme i-Raman NxG, i-Raman Duo und i-Raman Plus.



1 STK

607510030

USB-C-auf-USB-C-Kabel für i-Raman-Serie

USB-C-auf-USB-C-Kabel für die Systeme i-Raman NxG, i-Raman Duo und i-Raman Plus.



1 STK

607510850

Internationaler Steckeradapter



1 STK

607510130

Laserschutzbrille, Wellenlänge 785 nm

Laserschutzbrille, Wellenlänge 785 nm.



1 STK

6.6079.140

SpecSuite Softwarelizenz - Basislizenz

Basislizenz für SpecSuite Software



1 STK





607510450

Raman-Sonde in Laborqualität (785 nm)

Raman-Lichtleitersonde in Laborqualität mit Auslösetaste. 1.5 Meter Faserlänge. Kompatibel mit den Modellen i-Raman Plus 785S und 785HR.




Optionales Zubehör

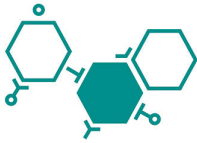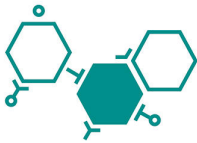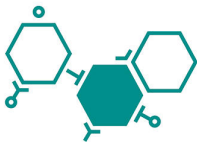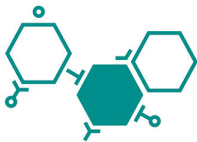Order no.	Beschreibung
66079150	SpecSuite Softwarelizenz - Identifizierung SpecSuite-Lizenz für die Identifizierung. Enthält das Bibliothekverwaltungsmodul und das Identifizierungsmodul.  SpecSui SPECTROSCOPY SOFTWARE
66079160	SpecSuite Softwarelizenz - Quantifizierung SpecSuite-Lizenz für die Quantifizierung. Enthält das Modul für die quantitative Modellentwicklung und Prädiktion für die Routineanalytik.  SpecSui SPECTROSCOPY SOFTWARE
66079170	SpecSuite Softwarelizenz - Regulatory Compliance SpecSuite-Lizenz für die Regulatory Compliance mit FDFA 21 CFR Part 11.  SpecSui SPECTROSCOPY SOFTWARE
66079180	Umfassende Bibliothek für SpecSuite Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek für SpecSuite – Über 27'700 Spektreneinträge von Chemikalien, Mineralien, organischen Chemikalien, Lösungsmitteln, Polymeren, Farbstoffen und Pigmenten, toxischen Industriechemikalien (TIC), toxischen Industriematerialien (TIM), Anorganika, Organometallen, Körperpflegeprodukten und verbotenen Substanzen.  SpecSui SPECTROSCOPY SOFTWARE

66079190

SpecSuite MCRL - Bibliothek anorganischer Stoffe und Organometalle

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) anorganischer Stoffe und Organometalle für die SpecSuite Software.

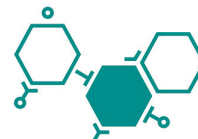


SpecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE

66079200

SpecSuite MCRL - komplette Bibliothek organischer Stoffe

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) organischer Stoffe für die SpecSuite Software.

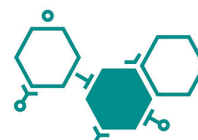


SpecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE

66079210

SpecSuite MCRL - Bibliothek der Körperpflegeprodukte

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Körperpflegeprodukte für die SpecSuite Software.

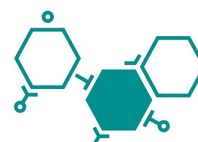


SpecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE

66079220

SpecSuite MCRL - Bibliothek der Polymere und Polymeradditive

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Polymere und Polymeradditive für die SpecSuite Software.

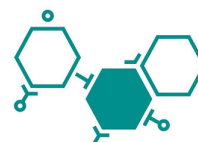


SpecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE

66079230

SpecSuite MCRL - Bibliothek der Farbstoffe, Pigmente und Färbemittel

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Farbstoffe, Pigmente und Färbemittel für die SpecSuite Software.

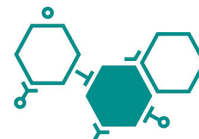


SpecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE

66079240

Bibliothek der Mineralien für SpecSuite

Metrohm Bibliothek der Mineralien für die SpecSuite Software.

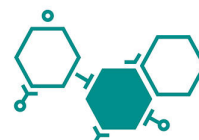


SpecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE

66079250

Umfassende USP-Bibliothek für SpecSuite

Umfassende Raman-USP-Bibliothek von Metrohm für SpecSuite mit ~ 900 nachweisbaren, zertifizierten Einträgen.

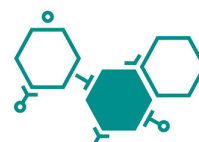


SpecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE

66079260

SpecSuite Bibliothek verbotener und gängiger Chemikalien

Metrohm Raman-Bibliothek verbotener und gängiger Chemikalien für die SpecSuite Software. Einschliesslich Drogen, toxischer Industriechemikalien (TIC), toxischer Industriematerialien (TIM), Ausgangsstoffen und gängiger Chemikalien.

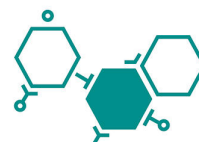

SpecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE

66079270

Bibliothek der Sprengstoffe für SpecSuite

Bibliothek der Sprengstoffe für die SpecSuite Software.



66079280

Bibliothek der chemischen Kampfstoffe (CWA) für SpecSuite

Bibliothek der chemischen Kampfstoffe (CWA) für die SpecSuite Software.



607510410

Vialhalterzubehör

Vialhalterzubehör zur Verwendung mit Raman-Sonden in Laborqualität mit einem Schaftdurchmesser von 9.5 mm. Kompatibel mit Vials mit einem Durchmesser von 15 mm. 6er Pack mit 15-mm-Vials aus Borosilikatglas ist im Lieferumfang enthalten.



607510420

Küvettenhalterzubehör


Küvettenhalter zur Verwendung mit Raman-Sonden in Laborqualität mit einem Schaftdurchmesser von 9.5 mm. Kompatibel mit Standardküvetten von 12.5 mm x 12.5 mm Aussendurchmesser (1 cm Pfadlänge) zur Probennahme bei Flüssigkeiten oder Pulvern.



607510430

Kappe zur Abstandsregelung


Kappe zur Abstandsregelung für Standardschaft von Raman-Sonden in Laborqualität.

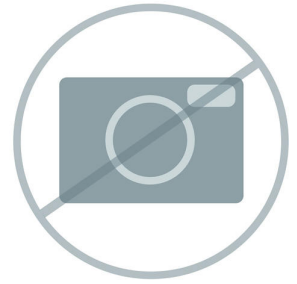

607510220

Standardschaft für Sonde in Laborqualität (785 nm)

Ersatzschaft für Raman-Sonde in Laborqualität für Anregung bei 785 nm. Arbeitsabstand 5.5 mm.

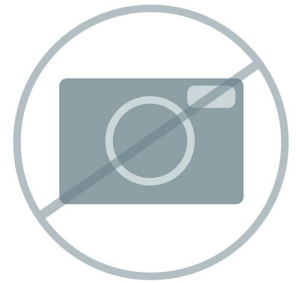

607510240

Hastelloy-Tauchschaft für Raman-Sonde in Laborqualität

Tauchschaft aus C-276 Hastelloy kompatibel mit Raman-Sonden in Laborqualität. Enthält einen verstellbaren Schaftadapter. Kompatibel mit den Wellenlängen 532, 785, 860 und 1064 nm.



607511010

Edelstahl-Tauchschaft für Raman-Sonde in Laborqualität

Tauchschaft aus 316 Edelstahl kompatibel mit Raman-Sonden in Laborqualität. Enthält einen verstellbaren Schaftadapter. Kompatibel mit den Wellenlängen 532, 785, 860 und 1064 nm.



607510460

Raman-Sonde in Laborqualität (785 nm), 5 m

Raman-Lichtleitersonde in Laborqualität mit Auslösetaste. 5 Meter Faserlänge. Kompatibel mit den Modellen i-Raman Plus 785S und 785HR.



607510400

Universeller Raman-Sondenhalter

Sondenhalter zur Verwendung mit Metrohms Raman-Sonden in Laborqualität, einschliesslich Schäften in Laborqualität, Tauchschäften in Industriequalität und See-Through-Schäften. Bietet manuelle XYZ-Grob- und -Feineinstellungen.




607511270

Lasergehäuse für i-Raman-Serie

Gehäuse für i-Raman Probennahme-Zubehör, einschliesslich Mikroprobennahmesystem und Sondenhalter. Dieses Gehäuse schützt die Augen und/oder die Haut vor direkter Laserstrahlung und macht den Laser der Klasse 3B der i-Raman-Reihe so sicher wie einen Laser der Klasse 1. Das Gehäuse ist ergonomisch gestaltet, um das Einsetzen der Probe und die Bedienung des Systems zu erleichtern.

Kompatibel mit den Produkten i-Raman NxG, i-Raman Duo und i-Raman Plus.

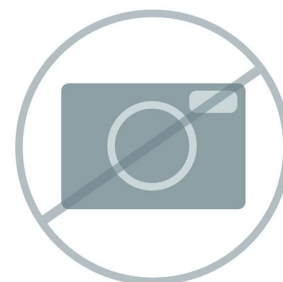

BWT-810000623 Stativadapter für den Mikroskopkopf

BAC151x-TRI Stativadapter für das BAC151x Probennahmesystem mit Raman-Videomikroskop.



Raman-Durchflusszelle aus Edelstahl für Inline-Raman-Messungen von flüssigen Proben über eine Schnittstelle zu Standard-Laborsonden (9,5 mm Durchmesser; Sonde ist nicht im Lieferumfang enthalten).




Packung mit 6 Vials aus Borosilikatglas (Durchmesser 15 mm) inklusive Tasche.




Mikroskopobjektiv, unendlich korrigiert, 10-fache Vergrößerung, Arbeitsabstand (mm) = 16, Brennweite (mm) = 20, numerische Apertur (NA) = 0.3.

RML110A

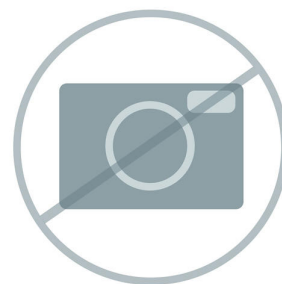

Mikroskopobjektiv, unendlich korrigiert, 20-fache Vergrößerung, Arbeitsabstand (mm) = 12 Brennweite (mm) = 10 numerische Apertur (NA) = 0.4.


RML120A

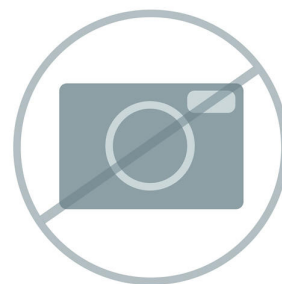

BWT-840000325 Videomikroskop-Objektiv, 50-fache Vergrößerung

Mikroskopobjektiv, unendlich korrigiert, 50-fache Vergrößerung, Arbeitsabstand (mm) = 9.15 Brennweite (mm) = 4 numerische Apertur (NA) = 0.55.


RML150A

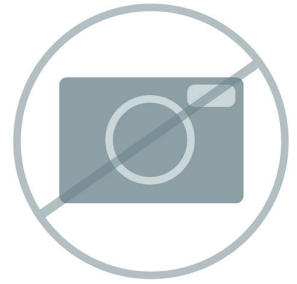

BWT-840000328 Videomikroskop-Objektiv, 100-fache Vergrößerung

Mikroskopobjektiv, unendlich korrigiert, 100-fache Vergrößerung, Arbeitsabstand (mm) = 3,2, numerische Apertur (NA) = 0,8, Brennweite (mm) = 2.

RML1100A

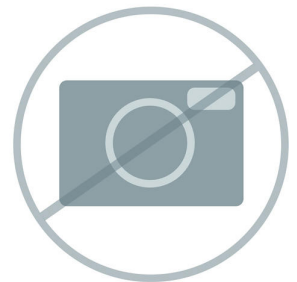

BWT-840000332 Tablettenhalter

Tablettenhalter kompatibel mit allen Modellen der Raman-Lichtleitersonde BAC100/BAC102 in Laborqualität mit 9,5 mm Schaftdurchmesser.



BW840000463 BAC151x Sondenadapter

BAC151x Sondenadapter für den Anschluss der Raman-Sonden von B&W Tek in Laborqualität an das Probennahmesystem BAC151x mit Videomikroskop. Entfernen Sie zur Verwendung des Adapters Standardschaft und Abstandsregler und verbinden Sie den Sondenkopf mit dem Videomikroskop. 3 Adapter pro Packung.



BWT-840000679 Raman-Zoomobjektiv (20-60 mm)

Zoomobjektiv für unsere BAC100/BAC102 Raman-Lichtleitersonden. Der Arbeitsabstand kann von 20 mm bis 60 mm justiert werden. Geeignet für einen Raman-Anregungsbereich von 500 nm bis 850 nm.



BWT-840000711 Raman-Zoomobjektiv (20-60 mm)

Zoomobjektiv für unsere BAC100/BAC102 Raman-Lichtleitersonden. Der Arbeitsabstand kann von 20 mm bis 60 mm justiert werden. Geeignet für einen Raman-Anregungsbereich von 785 nm bis 1064 nm.



BWT-840000680 Raman-Zoomobjektiv (60-600 mm)

Zoomobjektiv für BAC100/BAC102 Raman-Lichtleitersonden mit grossem Arbeitsabstand. Der Arbeitsabstand kann von 60 mm bis 600 mm justiert werden. Geeignet für einen Raman-Anregungsbereich von 500 nm bis 850 nm.



BWT-840000681 Raman Fernerkennungsobjektiv (0,6 m bis 6 m)

Ein Teleskop-Fernerkennungsobjektiv für BAC100/BAC102 Raman-Faseroptiksonden. Grosser Zoombereich für Probenmessbereiche von 0,6 Meter bis 6 Meter. Geeignet für einen Raman-Anregungsbereich von 500 nm bis 850 nm.

RTS202-VIS-NIR



Probennahmesystem mit Videomikroskop zur Verwendung mit den Raman-Sonden von B&W Tek für Labor und Industrie. Inklusive eines Objektivs mit 20-facher Vergrößerung bei einem Arbeitsabstand von 16 mm. Bietet manuelle Grob- und Feineinstellung auf den X-, Y- und Z-Achsen, koaxiale LED-Beleuchtung für die Zielausrichtung, Videokamera für die Probenbetrachtung und ist kompatibel mit Standard-Mikroskopobjektiven. Sonde ist nicht enthalten und separat erhältlich. 785 nm-Konfiguration.

BAC151C-785



Probennahmesystem mit Videomikroskop zur Verwendung mit den Raman-Sonden von B&W Tek für Labor und Industrie. Inklusive eines Objektivs mit 20-facher Vergrößerung bei einem Arbeitsabstand von 16 mm. Bietet manuelle Grob- und Feineinstellung auf den X-, Y- und Z-Achsen, koaxiale LED-Beleuchtung für die Zielausrichtung, Videokamera für die Probenbetrachtung und ist kompatibel mit Standard-Mikroskopobjektiven. Sonde ist nicht enthalten und separat erhältlich. Dual 532/785 nm-Konfiguration.

BAC151C-532/785



Probennahmekopf für Raman-System mit Videomikroskop zur Verwendung mit Raman-Sonden von B&W Tek für Labor und Industrie. Mit koaxialer LED-Beleuchtung für die Zielausrichtung und Videokamera für die Probenbetrachtung. Kompatibel mit Standard-Mikroskopobjektiven. Sonde ist nicht enthalten und separat erhältlich. Objektivlinse ist nicht enthalten und ist separat erhältlich. 785 nm-Konfiguration.



BWT-840000966 Probennahmekopf für Raman-System mit Videomikroskop (532/785 nm dual)

Probennahmekopf für Raman-System mit Videomikroskop zur Verwendung mit Raman-Sonden von B&W Tek für Labor und Industrie. Mit koaxialer LED-Beleuchtung für die Zielausrichtung und Videokamera für die Probenbetrachtung. Kompatibel mit Standard-Mikroskopobjektiven. Sonde ist nicht enthalten und separat erhältlich. Objektivlinse ist nicht enthalten und ist separat erhältlich. Dual 532/785 nm-Konfiguration.




607506480 SERS Discovery Kit

Einführungs-Kit für die SERS-Analyse mit Gold- und Silber-P-SERS-Teststreifen sowie Gold- und Silber-Kolloiden.



66079540 SpecSuite MCRL – Bibliothek pharmazeutischer Wirkstoffe

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) pharmazeutischer Wirkstoffe (API) für die SpecSuite Software.

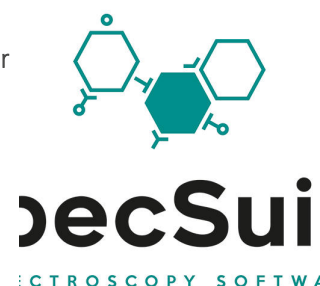

66079550 SpecSuite MCRL – Bibliothek der Biochemikalien


Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Biochemikalien für die SpecSuite Software.



66079560

SpecSuite MCRL – Bibliothek der Pestizide

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Pestizide für SpecSuite.

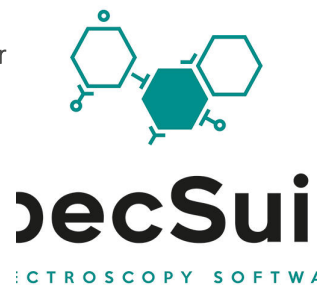

607511330

Externer Akku für die i-Raman-Reihe

Externer Lithium-Ionen-Akku, der unveränderliche 12 DVC für den Betrieb der Modelle i-Raman NxG, i-Raman Duo und i-Raman Plus liefert.

