



Metrosep Carb 2 - 250/2.0

6.01090.230

Die IC-Säule Metrosep Carb 2 - 250/2.0 eignet sich speziell für die Bestimmung von Kohlenhydraten unter Verwendung alkalischer Eluenten und der gepulsten amperometrischen Detektion. Die hochkapazitive Anionenaustauschsäule basiert auf einem Styrol/Divinylbenzol-Copolymer. Sie ist im Bereich von pH = 0–14 stabil und trennt Mono- und Disaccharide. Darüber hinaus ist sie auch für die Analyse von Zuckeralkoholen, Anhydrozucker, Aminos Zucker usw. geeignet. Die 250-mm-Microbore-Variante der Metrosep Carb 2 Trennsäule ist für komplexe Trennungen optimiert.

Durch den geringen Eluentverbrauch ist sie besonders für IC-MS-Kopplung geeignet.

Lieferumfang 6.01090.230

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

2 STK

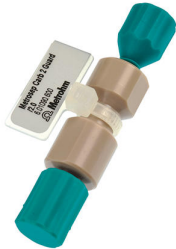
6.2744.060

Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.01090.600	Metrosep Carb 2 Guard/2.0	
	Die microbore Guardsäule, Metrosep Carb 2 Guard/2.0, entfernt wirkungsvoll Verunreinigungen und schützt so die analytische Trennsäule. Das Design der Guardsäule ist so gewählt, dass ihr Einfluss auf die chromatographische Trennung zu vernachlässigen ist.	
6.01806.000	PEEK-Kapillare 0.18 mm i.D. / 2 m	
	Zum Einsatz im Hochdruck-Flusspfad, z.B. als Vorwärmkapillare für Metrosep Carb 2 Säulen in 2-mm-Ausführung (6.01090.2x0).	
6.1015.200	Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4.0	
	Trap-Säule zur Entfernung von Borat-Verunreinigungen aus dem Eluenten. Die Metrosep BO ₃ Trap 1 - 100/4.0 wird hauptsächlich in der Kohlenhydratanalyse mit Hydroxideluenten eingesetzt.	
6.1015.300	Metrosep CO3 Trap 1 - 100/4.0	
	Trap-Säule zur Entfernung von Carbonat-Spuren in Hydroxideluenten.	