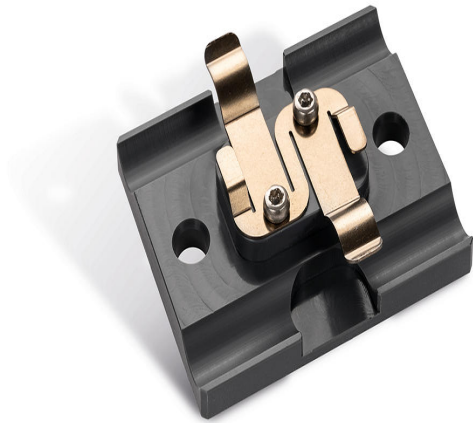




MISP-Halter, Trap-Säule

6.02006.110

Halterung zur Befestigung von Trap-Säulen in der OMNIS MISP Unit.

Optionales Zubehör

6.1014.000

Metrosep A Trap 1 - 100/4.0



Hochkapazitive Anionensäule, die zur Reinigung des Eluentenstroms eingesetzt wird. Selbst Reagenzien der höchsten Qualitätsstufe, z. B. «Ultrapur» oder «puriss» können noch minimale anionische Verunreinigungen enthalten. Diese werden von der Metrosep A Trap 1 - 100/4.0 sicher zurückgehalten.

Diese Säule wird vor allem bei Gradientenapplikationen eingesetzt.

6.1014.100

Metrosep RP Trap 1 - 50/4.0



Die Metrosep-Säule RP Trap 1 - 50/4.0 wird für die Entfernung organischer Verunreinigungen aus dem Eluenten verwendet. Die Metrosep RP Trap 1 - 50/4.0 Säule hilft eluentbedingte Störungen in der Grundlinie vor allem bei Gradientensystemen zu vermeiden. Ihre Verwendung wird auch für die Reinigung des p-Cyanophenol-Eluenten der Trennsäulen Metrosep Dual 4 empfohlen.

6.1014.150

Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0



Die Metrosep-Säule RP Trap 2 - 100/4.0 wird für die Entfernung organischer Verunreinigungen aus dem Eluenten verwendet. Die Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0 Säule hilft eluentbedingte Störungen in der Grundlinie vor allem bei Gradientensystemen zu vermeiden. Sie basiert auf einem polymeren Material. Dadurch lässt sich die Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0 sowohl im sauren wie auch im basischen pH-Bereich einsetzen.

6.1014.200

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0

Die Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 Säule wird zur Entfernung ionischer, das heisst kationischer und anionischer Verunreinigungen aus wässrigen Lösungen eingesetzt. Ihre Anwendung ist vor allem im Rahmen von «MISP», der «Metrohm Inline Sample Preparation», zur Reinigung des Transferwassers zu empfehlen. Durch die Verwendung der Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 Säule können Einflüsse des Transferwassers auf den Systemblank stark vermindert werden.

6.1015.000

Metrosep C Trap 1 - 100/4.0

Hochkapazitive Kationensäule, die zur Reinigung des Eluentenstroms eingesetzt wird. Selbst Reagenzien der höchsten Qualitätsstufe, z. B. «Ultrapur» oder «puriss» können noch minimale kationische Verunreinigungen enthalten. Diese werden von der Metrosep C Trap 1 - 100/4.0 sicher zurückgehalten.

6.1015.200

Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4.0

Trap-Säule zur Entfernung von Borat-Verunreinigungen aus dem Eluenten. Die Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4.0 wird hauptsächlich in der Kohlenhydratanalyse mit Hydroxideluenten eingesetzt.

6.1015.300

Metrosep CO₃ Trap 1 - 100/4.0

Trap-Säule zur Entfernung von Carbonat-Spuren in Hydroxideluenten.