



IC-Ausrüstung: MiPCT

6.5330.140

Zubehörset zur Inline-Anreicherung (MiPCT) inklusive Liquid Handling Station links.

Lieferumfang 6.5330.140

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1014.200	Metrosep I Trap 1 - 100/4.0

Die Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 Säule wird zur Entfernung ionischer, das heisst kationischer und anionischer Verunreinigungen aus wässrigen Lösungen eingesetzt. Ihre Anwendung ist vor allem im Rahmen von «MISP», der «Metrohm Inline Sample Preparation», zur Reinigung des Transferwassers zu empfehlen. Durch die Verwendung der Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 Säule können Einflüsse des Transferwassers auf den Systemblank stark vermindert werden.



1 STK

6.1602.160

Flaschenaufsatz für Eluenten und Reagenzien GL 45

Für Eluenten-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.



1 STK

6.1608.070

Eluentenflasche / 2 L / GL 45




1 STK

6.1618.020

Gewindeadapter / S40 auf GL 45

Adapter für Flaschen mit S40-Gewinde (Merck...) auf GL 45.

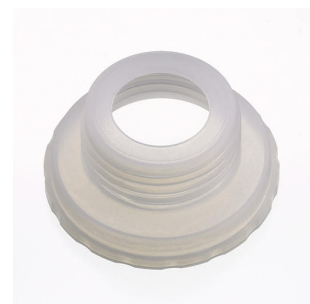

1 STK

6.1624.000

Adapter NS 14 zum Adsorberrohr 6.1619.XXX

Adapter NS 14. Für das Adsorberrohr 6.1619.010 im Dilution Sample Processor.



1 STK

6.1805.120

FEP-Schlauch / M6 / 100 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1819.110

FEP-Ansaugschlauch zu Kanister

Ansaugschlauch zu Kanisteraufsatz mit M6-Anschluss. Zur Eluentenherstellung.



1 STK

6.1825.280

PFA-Transferschlauch 20 mL, 1/8 in.



2 STK

6.1831.180

PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m




1 STK

6.2057.210

Dosinohalter zu IC-Geräten

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.

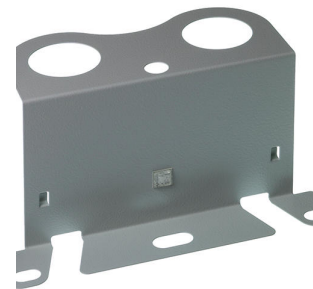

1 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



2 STK

6.2744.080

Adapter Gewinde M6 / UNF 10/32

Mit M6 Aussengewinde. Für IC-Geräte.



1 STK

6.2841.120

Liquid Handling Station, links

Kombinierte Spül- und Verdünnungsstation zu Probenwechslern mit Swinghead. Zur Montage links vom Turm.



1 STK

6.1580.150

807 Dosing Unit 5 mL ohne Zubehör

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 5 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45.



1 STK

6.1619.000

Adsorberrohr für 807 Dosing Unit

