



Salt Titrino plus

2.848.2010

El Salt Titrino plus le ofrece el paquete completo para el análisis del cloruro en las más variadas muestras. Además de los métodos de determinación descritos en detalle, también recibirá todos los accesorios para sus titulaciones. En el paquete se incluyen un titulador, un agitador magnético así como un Ag-Titrode, un electrodo que no precisa mantenimiento para la titulación de solución con nitrato de plata.

Partes/accesorios 2.848.2010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.848.0010	848 Titrino plus

Titulador compacto para

- titulaciones dinámicas (DET) con detección automática del punto de equivalencia
- titulaciones monótonas (MET) con detección automática del punto de equivalencia
- titulaciones a punto final (SET)



1 PCS

1.801.0010

801 Stirrer

Agitador magnético sin soporte como complemento para los aparatos Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample Processor, 805 Dosimat y 780 /781 pH Meter. Con cable fijo para MSB (Metrohm Serial Bus).



1 PCS

6.1903.020

Varilla de agitador / 16 mm

Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento de PTFE, 16 mm de largo



1 PCS

6.1903.030

Imán agitador / 25 mm

Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud 25 mm.




1 PCS

6.2001.060

Consola de soporte sin barra de soporte

Para el montaje de agitadores 801, 804, 803 en un Titrando, Titrino plus, Dosimat plus y módulos de medida 856 y 867.

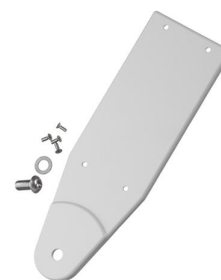

1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 PCS

6.2016.070

Barra de soporte / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Portaelectrodo

Portaelectrodo para 4 electrodos y 2 puntas de bureta



1 PCS

6.2104.020

Cable de electrodo / 1 m / F

Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.



1 PCS

6.2147.000

Teclado numérico USB

Teclado numérico USB para el Titrino plus, el Dosimat plus, el 862 Compact Titrator, el 869 Compact Sample Changer, el 863 Compact Autosampler y el 899 Coulometer. Incluye dos conectores USB integrados.



1 PCS

6.2151.100

Adaptador USB Mini (OTG) - USB A

Para conexión de aparatos USB.



1 PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

Llave hexagonal 2 mm

2 mm.



1 PCS

6.2723.310

Cubierta protectora para Titrino Plus

Cubierta protectora para pantalla y teclado para todos los aparatos de la familia Titrino plus.

Adecuado para: 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF-Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus y 899 Coulometer.



1 PCS

6.2739.010

Llave

Para Unidades intercambiables.



1 PCS

6.3026.220

Unidad intercambiable 20 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de vidrio 20 mL y protección contra la luz. Grifo plano de PCTFE/PTFE, racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión y botella de reactivo estándar de vidrio ámbar.



1 PCS

6.6061.010

Llave USB con métodos para Titrino plus

Contiene los métodos de FOOD PAC, WINE PAC y OIL PAC para importación directa a Titrino plus.



Electrodo de anillo de plata combinado con una membrana de vidrio de pH como electrodo de referencia.

Este electrodo no precisa mantenimiento y es apto para titulaciones por precipitación con un valor de pH constante (reactivo de titulación: nitrato de plata), por ejemplo, a partir de:


- Cloruro, bromuro, yoduro
- Sulfuros
- Ácido sulfhídrico
- Mercaptano
- Cianuro

Este electrodo se conserva en agua destilada.

Dependiendo de la aplicación, se recomienda el uso de un Ag-Titrode con recubrimiento (de AgBr, AgCl o Ag₂S), que se puede incluir en el pedido.



Accesorios opcionales

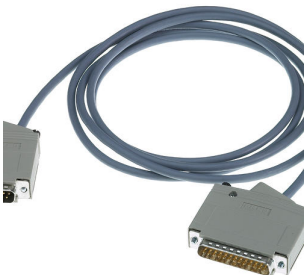Order no.	Descripción	
6.2141.230	Cable de conexión «remote» Compact - Titrino plus/Pump Station Cable para conexión a distancia entre Compact Sample Changer /Compact Autosampler y Titrino plus y/o Pump Station.	
6.2141.240	Cable de conexión «remote» Dosimat plus - Compact Sample Changer/Titrino plus Cable para conexión «remote entre Dosimat plus y Compact Sample Changer y/o Titrino plus; usando el cable 6.2141.260.	
6.2141.250	Cable de conexión «remote» Compact Sample Changer - Titrino Cable para conexión «remote entre Compact Sample Changer y Titrino con conector «remote de 25 polos.	
6.2141.260	Cable de conexión «remote» Compact Sample Changer - Dosimat plus y Titrino plus Cable de distribución para conexión «remote del Compact Sample Changer a Dosimat plus y otros aparatos (p.ej. Titrino plus o Pump Station).	

6.2151.120

Cable USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m

Para conexión de aparatos USB.



6.3026.110

Unidad intercambiable 1 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de vidrio 1 mL y protección contra la luz. Grifo plano de PCTFE/PTFE, racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión y botella de reactivo estándar de vidrio ámbar.



6.3026.150

Unidad intercambiable 5 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de vidrio 5 mL y protección contra la luz. Grifo plano de PCTFE/PTFE, racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión y botella de reactivo estándar de vidrio ámbar.



6.3026.210

Unidad intercambiable 10 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de vidrio 10 mL y protección contra la luz. Grifo plano de PCTFE/PTFE, racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión y botella de reactivo estándar de vidrio ámbar.



6.3026.250

Unidad intercambiable 50 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado con cilindro de vidrio 50 mL y protección contra la luz. Llave plana de PCTFE/PTFE, conexión de tubo FEP, punta de bureta antidifusora y botella de reactivo estándar de vidrio ámbar.



2.142.0100

Impresora térmica Custom Q3X

Impresora compacta con interface USB para

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (cable 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Ancho de papel de 60 mm (40 caracteres). Incluye cable USB 6.2151.120.
