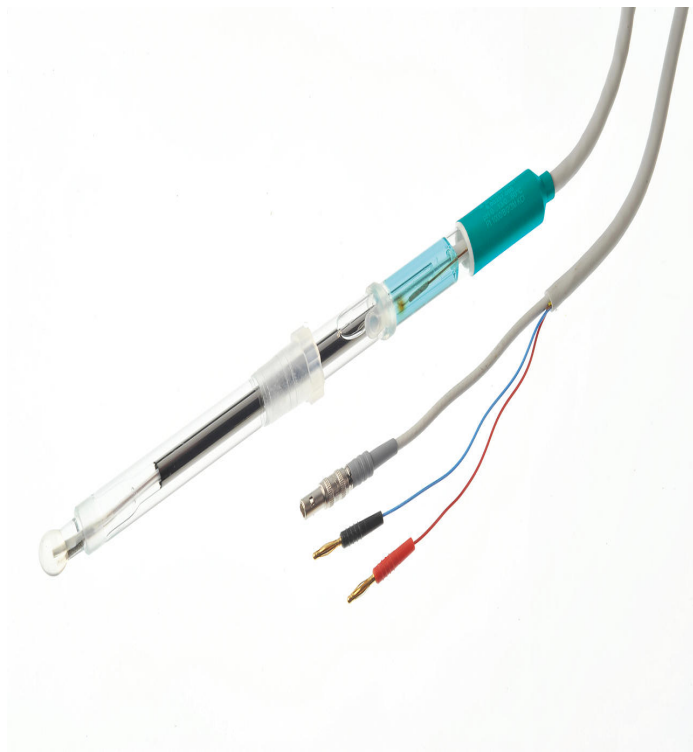




Aquatrode Plus con Pt1000 (cable fijo)

6.00257.000

Electrodo pH combinado con sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (2,0 m, clavija de banana de 2 mm) para medida de pH/titulación en medios acuosos pobres en iones (p. ej., agua potable, agua de proceso) y que también muestra un tiempo de respuesta extremadamente rápido en estas muestras.

El diafragma esmerilado fijo es insensible a la suciedad.

Con el uso de una $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ como electrolito intermedio se recomienda el almacenamiento en una solución de conservación.

El electrolito intermedio se puede cambiar por un electrolito libre de cloruro (p. ej., nitrato potásico $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010)), con conservación en el electrolito utilizado.

Partes/accesorios 6.00257.000

Order Number	Descripción	Cantidad
6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm	1 Stk



Manguito EN 14/12 mm de polietileno.

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

1 Stk



Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.

Accesorios opcionales

6.2308.020

Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL)

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag/AgCl)



6.2323.000

Solución de conservación

Solución de conservación para todos los electrodos de vidrio pH combinados con electrolito de referencia $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$



6.2325.000

pHit kit

Kit de mantenimiento para electrodos pH

El kit incluye lo siguiente:

- Solución para limpieza de 50 mL
- Solución de KCl 3M de 50 mL
- Solución de conservación de 50 mL
- 2 recipientes de almacenamiento
- Instrucciones de uso



6.2310.010

Electrolito KNO₃ -1 mol/L 250 mL

Solución de electrolito KNO₃ 1 M (electrolito de referencia para electrodos de plata combinados)



6.2103.150

Adaptador rojo enchufe 4 mm / conector 2 mm

Adaptador para conexión de electrodos con enchufe 2 mm en aparatos con conector 4 mm (clavija banana)



6.2325.100

Solución de limpieza 3 x 50 mL

Solo el cuidado preventivo y regular de la membrana de vidrio pH y del diafragma garantiza resultados de medida fiables durante un largo periodo de tiempo. La limpieza por cauterización con productos químicos tóxicos o el tratamiento mecánico del diafragma no solo es un proceso complicado y costoso, sino que también acelera el envejecimiento del electrodo de vidrio pH. La solución limpiadora ha sido desarrollada para limpiar los electrodos de vidrio pH con facilidad y suavidad. El uso habitual puede alargar significativamente su vida útil.

Esta solución limpiadora también forma parte del kit pHit.

