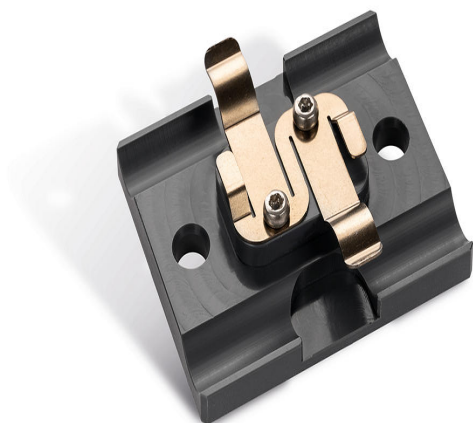




Soporte MISP para columna de retención selectiva

6.02006.110

Soporte para fijar la columna de retención selectiva en la OMNIS MISP Unit.

Accesorios opcionales

6.1014.000

Metrosep A Trap 1 - 100/4,0



Esta columna de aniones de gran capacidad se utiliza para limpiar el flujo de eluyente. Incluso los reactivos de máxima calidad, p. ej., de grado «ultrapuro» o «puriss», contienen cantidades mínimas de contaminación aniónica. La Metrosep A Trap 1 - 100/4,0 permite suprimirla de manera segura.

Esta columna se utiliza principalmente para aplicaciones de gradiente.

6.1014.100

Metrosep RP Trap 1 - 50/4,0



La columna Metrosep RP Trap 1 - 50/4,0 se utiliza para eliminar contaminaciones orgánicas del eluyente. La columna Metrosep RP Trap 1 - 50/4,0 ayuda a evitar las perturbaciones relacionadas con el eluyente en la base, sobre todo en los sistemas de gradientes. También se recomienda su uso para limpiar el eluyente p-cianofenol de las columnas de separación Metrosep Dual 4.

6.1014.150

Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0



La columna Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0 se utiliza para eliminar contaminaciones orgánicas del eluyente. La columna Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0 ayuda a evitar las perturbaciones relacionadas con el eluyente en la base, sobre todo en los sistemas de gradientes. Está basada en un material polimérico. Por ese motivo, la columna Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0 se puede utilizar tanto en sistemas de pH ácido como básico.

6.1014.200

Metrosep I Trap 1 - 100/4,0

La columna Metrosep I Trap 1 - 100/4,0 se utiliza para eliminar contaminaciones iónicas, es decir, para extraer contaminaciones aniónicas y catiónicas de soluciones acuosas. Su utilización se recomienda sobre todo en relación con "MISP", la "Metrohm Inline Sample Preparation", para limpiar el agua de transferencia. Utilizando la columna Metrosep I Trap 1 - 100/4,0 se pueden evitar las influencias del agua de transferencia en el ensayo en blanco del sistema.

6.1015.000

Metrosep C Trap 1 - 100/4,0

Esta columna de cationes de gran capacidad se utiliza para limpiar el flujo de eluyente. Incluso los reactivos de máxima calidad, p. ej., de grado "ultrapuro" o "puriss", contienen cantidades mínimas de contaminación catiónica. La Metrosep C Trap 1 - 100/4,0 permite suprimirla de manera segura.

6.1015.200

Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4,0

Columna Trap para eliminar del eluyente las contaminaciones de borato. La Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4,0 se emplea principalmente en los análisis de carbohidratos con eluyentes de hidróxido.

6.1015.300

Metrosep CO3 Trap 1 - 100/4,0

Columna Trap para eliminar trazas de carbonato en eluyentes de hidróxido.