



Juego de accesorios OMNIS IC: PP Reg.

6.05332.040

Set de accesorios para la regeneración de MSM con Peristaltic Pump Unit.

Requisitos:

OMNIS IC S/M/L, que incluye:

– canal disponible en la OMNIS Peristaltic Pump Unit

Partes/accesorios 6.05332.040

Order Number	Descripción	Cantidad
6.02837.040	Tubo filtrante Tubo filtrante con adaptador Luer; protege los eluyentes y reactivos de las partículas.	1 PCS
		
6.05000.010	Kit de accesorios: Botella OMNIS IC, PP, 2 L Set de accesorios OMNIS IC para instalar la botella de reactivo en el Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		
6.2744.034	Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 2x Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 2 unidades. Para aparatos CI con bomba peristáltica.	1 PCS
		

6.01803.110

Capilar PTFE RO - PP, 900/0,5 mm

1 PCS

Capilar PTFE previamente cortado con etiquetas de identificación para OMNIS IC



6.01826.010

Tubo de bomba, 0,5 mm d. i., naranja - amarillo

1 PCS


Tubo de bomba con un diámetro interior de 0,5 mm para el uso con la Peristaltic Pump Unit en el OMNIS IC System. Este tubo flexible permite el transporte fiable y controlado de líquidos para, por ejemplo, diálisis, regeneración de supresores o soluciones PCR. Está diseñado para brindar un rendimiento de flujo uniforme durante la operación. Está hecho de un material cuyas propiedades facilitan el funcionamiento estable en condiciones analíticas de rutina.



Accesorios opcionales

2.1056.1010

OMNIS Peristaltic Pump Unit 1-Channel

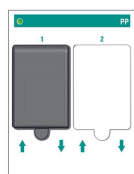

La OMNIS Peristaltic Pump Unit sirve como bomba peristáltica en el OMNIS IC System que transporta muestras y soluciones auxiliares.

Esta unidad opera con base en el principio de desplazamiento, es decir, la deformación mecánica externa del tubo de bomba empuja los líquidos a través de él. El tubo de bomba se deforma al ser presionado por un cabezal de rodillos rotatorio.


La bomba peristáltica de 1 canal puede ampliarse a una bomba peristáltica de 2 canales, con lo cual ambos canales pueden operarse con un régimen de revoluciones distinto.

Especificaciones:

- Cantidad de canales: 1 (ampliable a 2)
- Incremento del régimen de revoluciones: 2,5 rpm
- Régimen de revoluciones mínimo: 2,5 rpm
- Régimen de revoluciones máximo: 250 rpm
- Dirección de rotación: en el sentido de las agujas del reloj

2.1056.1020

OMNIS Peristaltic Pump Unit 2-Channel

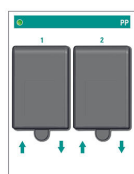

La OMNIS Peristaltic Pump Unit sirve como bomba peristáltica en el OMNIS IC System que transporta muestras y soluciones auxiliares.

Esta unidad opera con base en el principio de desplazamiento, es decir, la deformación mecánica externa del tubo de bomba empuja los líquidos a través de él. El tubo de bomba se deforma al ser presionado por un cabezal de rodillos rotatorio.

Ambos canales pueden operarse independientemente uno del otro con un régimen de revoluciones distinto, lo que incrementa la flexibilidad para las aplicaciones más variadas.

Especificaciones:

- Cantidad de canales: 2
- Incremento del régimen de revoluciones: 2,5 rpm
- Régimen de revoluciones mínimo: 2,5 rpm
- Régimen de revoluciones máximo: 250 rpm
- Dirección de rotación: en el sentido de las agujas del reloj