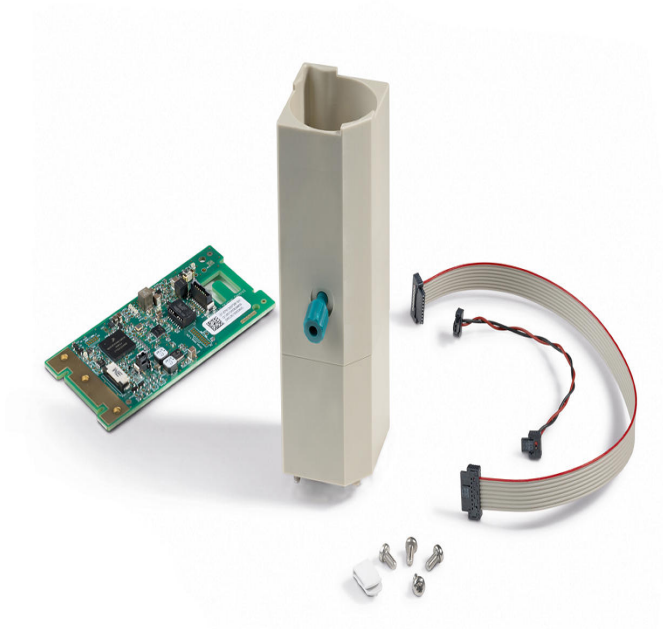




Kit de estación de dilución

6.05801.250

La estación de dilución sirve para la dilución automática de muestras. Una OMNIS Dosing Drive Unit mide con precisión una cantidad definida de la muestra concentrada. La muestra concentrada se transfiere al recipiente de dilución con el volumen necesario de solución de dilución. El agitador magnético integrado mezcla uniformemente la muestra concentrada y la solución de dilución. A continuación, la muestra diluida se lleva a la vía de la muestra a través de la salida de muestras.

Metrohm recomienda utilizar el siguiente imán agitador:

– Imán agitador / 8 x 3 mm (6.1903.000)

La estación de dilución cuenta con un desagüe. El líquido presente en el desagüe es recogido en una estación de goteo, desde allí fluye hacia el detector de fugas y se evacua seguidamente al sistema del tubo de desagüe.

Como máximo, solo se puede instalar 1 estación de dilución por cambiador de muestras. En caso de suciedad, el recipiente de dilución puede limpiarse o sustituirse.

Nota: Esta actualización debe ser instalada por el servicio técnico de Metrohm autorizado.

Accesorios opcionales

6.1903.000

Imán agitador / 8 x 3 mm

Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud de 8 mm y diámetro de 3 mm.

