



Titreur conductimétrique avec unité interchangeable

2.856.3210

Ensemble complet pour le titrage conductimétrique destiné à la détermination des acides alpha dans les produits à base de houblon selon EBC 7.4.

Avec un 856 Conductivity Module, un 801 Agitateur magnétique, un 805 Dosimat, une unité interchangeable 20 mL, une cellule de mesure de conductivité et le logiciel tiamo™ light.

Contenu de la livraison 2.856.3210

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.801.0010	801 Stirrer

Agitateur magnétique sans potence pour compléter les Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample Processors, 805 Dosimat et 780/781 pH Meter. Avec câble attendant pour MSB (Metrohm Serial Bus).



1 STK

1.805.0010

805 Dosimat

Moteur de burette pour Titrande avec système de lecture/écriture pour les Unités interchangeables intelligentes. Avec câble attachant. Sans Unité interchangeable.



1 STK

1.856.0010

856 Conductivity Module

Module de mesure de la conductivité comme extension d'un système Titrande en place ou, en appareil autonome, en association avec un 900 Touch Control. Le 856 Conductivity Module permet de mesurer la conductivité et la température ainsi que de déterminer les TDS et la salinité. Il est compatible avec les cellules de mesure de conductivité à 5 pôles, des cellules de mesure de toute dernière technologie.

La valeur pH et la conductivité peuvent être mesurées sans interférence dans un même bécher grâce à l'entrée de mesure à séparation galvanique.

Le Conductivity Module dispose de 2 interfaces USB pour la connexion d'imprimantes, de lecteurs de code barre ou de passeurs d'échantillons, ainsi que de 4 interfaces MSB pour agitateurs ou Dosino.

Que ce soit en association avec le 900 Touch Control comme appareil de mesure autonome ou comme élément intégré au *tiamo*™ full (à partir de la version 2.0), il satisfait aux exigences des BPL et de la FDA 21 CFR partie 11.



1 STK

6.0915.100

Cellule de mesure de conductivité à 5 pôles $c = 0,7 \text{ cm}^{-1}$ avec Pt1000 (câble fixe)

Cellule de mesure de conductivité à 5 pôles avec constante de cellule $c = 0,7 \text{ cm}^{-1}$ (valeur guide) avec capteur de température intégré Pt1000 et câble fixe (1,2 m) pour connexion au 856 Conductivity Module.

Ce capteur est adapté aux mesures de moyenne conductivité (de $5 \mu\text{S}/\text{cm}$ à $20 \text{ mS}/\text{cm}$) comme dans :

- l'eau potable
- l'eau de surface
- les eaux usées



1 STK

6.1903.020

Barreau d'agitation / 16 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 16 mm



1 STK

6.1903.030

Barreau d'agitation / 25 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.




1 STK

6.2001.060

Console statif sans potence

Pour le montage de l'agitateur 801, 804, 803 au Titrande, Titrino plus, Dosimat plus ou 856/867

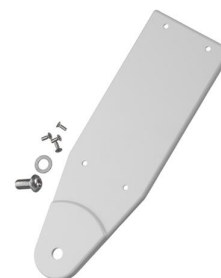

1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2016.070

Potence / 400 mm



1 STK

6.2021.020

Support d'électrode

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette



1 STK

6.2065.000

Cadre d'empilage pour 846 Dosing Interface, 856 Conductivity Module, 867 pH Module

Support du «Reagent Organizer sur la Dosing Interface



1 STK

6.2151.000

Câble USB A – Mini-DIN 8 pôles

Câble pour Controller



1 STK

6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2621.130

Clé hexagonale 2 mm

2 mm.



1 STK

6.2739.010

Clé

Pour Unités interchangeables.



1 STK

6.3026.220

Unité interchangeable 20 mL

Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 20 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.

