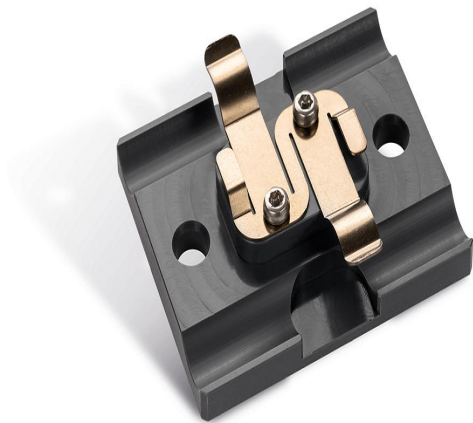




Support MISP, colonne Trap

6.02006.110

Support de fixation des colonnes Trap dans l'OMNIS MISP Unit.

Accessoires optionnels

6.1014.000

Metrosep A Trap 1 - 100/4,0



Colonne anionique haute capacité utilisée pour le nettoyage du flux d'éluant. Même les produits chimiques de la plus grande qualité, tels que « ultrapurs » ou « puriss », peuvent encore contenir une contamination anionique minimale. La Metrosep A Trap 1 - 100/4,0 permet de l'éliminer totalement.

Cette colonne s'utilise essentiellement pour les applications avec gradient d'élution.

6.1014.100

Metrosep RP Trap 1 - 50/4,0



La colonne Metrosep RP Trap 1 - 50/4,0 est utilisée pour l'élimination de contaminations organiques dans les éluants. La colonne Metrosep RP Trap 1 - 50/4,0 aide à la prévention des perturbations de ligne de base liées aux éluants, en particulier dans les systèmes gradients. Elle est aussi utilisée pour la purification de l'éluant p-cyanophénol des colonnes de séparation Metrosep Dual 4.

6.1014.150

Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0



La colonne Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0 est utilisée pour l'élimination de contaminations organiques dans les éluants. La colonne Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0 aide à la prévention des perturbations de ligne de base liées aux éluants, en particulier dans les systèmes gradients. Elle se base sur un matériau polymère. Ainsi est-il possible d'utiliser la Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0 dans une gamme de pH aussi bien acide que basique.

6.1014.200

Metrosep I Trap 1 - 100/4,0

La colonne Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 est prévue pour l'élimination de la contamination ionique, c'est-à-dire cationique et anionique, des solutions aqueuses. Son utilisation est surtout conseillée dans le cadre de la « MISP », « Metrohm Inline Sample Preparation », pour le nettoyage de l'eau de transfert. L'utilisation de la colonne Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 permet de réduire nettement l'influence de l'eau de transfert sur le Systemblank.

6.1015.000

Metrosep C Trap 1 - 100/4,0

Colonne cationique haute capacité utilisée pour le nettoyage du flux d'éluant. Même les réactifs de la plus grande qualité, tels que « ultrapurs » ou « puriss », peuvent encore contenir une contamination cationique minimale. La Metrosep C Trap 1 - 100/4.0 permet de l'éliminer totalement.

6.1015.200

Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4,0

Colonne Trap pour l'élimination de contaminations de borate dans les éluants. La Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4,0 est principalement utilisée pour l'analyse des glucides avec des éluants d'hydroxyde.

6.1015.300

Metrosep CO₃ Trap 1 - 100/4,0

Colonne piège pour l'élimination de traces de carbonate dans les éluants d'hydroxyde.