



Équipement OMNIS IC : PP rég.

6.05332.040

Jeu d'accessoires pour la régénération du MSM avec Peristaltic Pump Unit.

Conditions préalables :

OMNIS IC S/M/L, comprenant :

- Canal d'OMNIS Peristaltic Pump Unit disponible

Contenu de la livraison 6.05332.040

Order Number	Description	Quantité
6.02837.040	Tube de filtration Tube de filtration avec adaptateur Luer, protège les éluants et les réactifs des particules.	1 PCS
		
6.05000.010	Kit d'accessoires : bouteille OMNIS IC, PP, 2 l Jeu d'accessoires OMNIS IC pour installer la bouteille à réactifs sur Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		
6.2744.034	Accouplement olive/UNF 10/32 2 x Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 2 pièces. Pour appareils CI avec pompe péristaltique.	1 PCS
		

6.01803.110

Capillaire PTFE RO - PP, 900/0,5 mm

1 PCS

Capillaire PTFE prédécoupé avec étiquette d'identification pour OMNIS IC



6.01826.010

Tuyau de pompe, d. i. 0,5 mm, orange - jaune

1 PCS


Tuyau de pompe d'un diamètre intérieur de 0,5 mm à utiliser avec la Peristaltic Pump Unit dans l'OMNIS IC System. Le tuyau permet un transport fiable et contrôlé des liquides, notamment pour la dialyse, la régénération de supprimeur ou les solutions PCR. Sa conception garantit une performance d'écoulement constante pendant le fonctionnement. Les propriétés de son matériau assurent un fonctionnement stable dans des conditions d'analyse courantes.



Accessoires optionnels

2.1056.1010

OMNIS Peristaltic Pump Unit 1-Channel

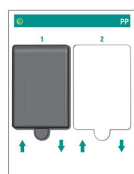

L'OMNIS Peristaltic Pump Unit sert de pompe péristaltique dans l'OMNIS IC System qui achemine les échantillons et les solutions auxiliaires.

Elle fonctionne selon le principe de refoulement, c'est-à-dire que les liquides sont poussés à travers le tuyau de la pompe par une déformation mécanique externe du tuyau de pompe. Le tuyau de pompe se déforme lorsqu'il est pressé contre une tête à rouleaux en rotation.


La pompe péristaltique à 1 canal peut être transformée en pompe péristaltique à 2 canaux, les 2 canaux pouvant fonctionner à des vitesses de rotation différentes.

Spécifications :

- Nombre de canaux : 1 (extensible à 2)
- Vitesse de rotation incrément : 2,5 tr/min
- Vitesse de rotation minimale : 2,5 tr/min
- Vitesse de rotation maximale : 250 tr/min
- Direction de rotation : sens horaire

2.1056.1020

OMNIS Peristaltic Pump Unit 2-Channel

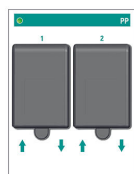

L'OMNIS Peristaltic Pump Unit sert de pompe péristaltique dans l'OMNIS IC System qui achemine les échantillons et les solutions auxiliaires.

Elle fonctionne selon le principe de refoulement, c'est-à-dire que les liquides sont poussés à travers le tuyau de la pompe par une déformation mécanique externe du tuyau de pompe. Le tuyau de pompe se déforme lorsqu'il est pressé contre une tête à rouleaux en rotation.

Les deux canaux peuvent fonctionner indépendamment avec une vitesse de rotation différente, ce qui augmente la flexibilité pour différentes applications.

Spécifications :

- Nombre de canaux : 2
- Vitesse de rotation incrément : 2,5 tr/min
- Vitesse de rotation minimale : 2,5 tr/min
- Vitesse de rotation maximale : 250 tr/min
- Direction de rotation : sens horaire