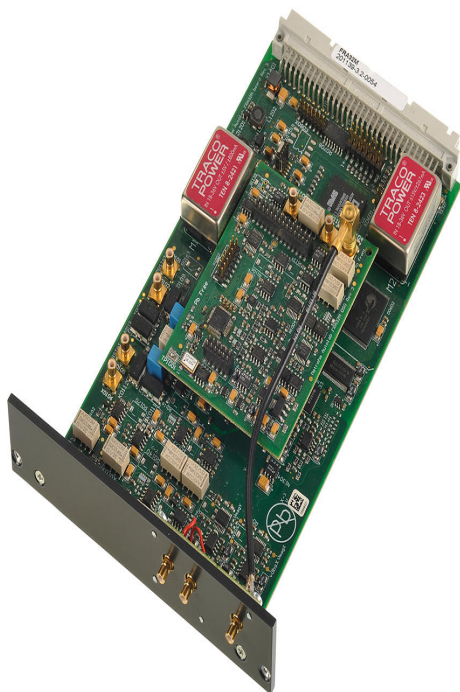




Module électrochimique avec microbalance à quartz

EQCM.S

Le module EQCM fournit les moyens d'effectuer des expériences électrochimiques avec une microbalance à quartz. Le module EQCM mesure une variation de masse par unité de surface en enregistrant la variation de la fréquence de résonance d'un oscillateur à quartz.

Des mesures dans la plage inférieure $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ sont possibles. L'EQCM peut être équipé de cristaux de taille AT 6 MHz.

Le module EQCM est fourni avec une cellule électrochimique adéquate, une électrode de référence et une contre-électrode, ainsi que deux cristaux de 6 MHz dorés.

Contenu de la livraison EQCM.S

Order Number	Description	Quantité
EQCM.AU	Électrode de travail en cristal EQCM 6 MHz Au/TiO₂ Électrode de travail en cristal EQCM 6 MHz Au/TiO ₂	2 PCS
		
EQCM.CE	Contre-électrode EQCM Contre-électrode à bobine en or pour cellule Autolab EQCM.	1 PCS
		
EQCM.REF.EL.S	Électrode de référence Ag/AgCl 3M KCl Électrode de référence Ag/AgCl 3M KCl	1 PCS
		

Accessoires optionnels

EQCM.AU

**Électrode de travail en cristal
EQCM 6 MHz Au/TiO₂**

Électrode de travail en cristal EQCM 6 MHz Au/TiO₂



EQCM.PT

**Électrode de travail en cristal
EQCM 6 MHz revêtu de Pt**

Électrode de travail en cristal EQCM 6 MHz revêtu de Pt

