



Modulo principale Pick&Place L

2.1012.0010

Modulo principale per l'ampliamento di un OMNIS SampleRobot Pick&Place della misura L. Per l'ampliamento completo sono necessari una base del modulo e due basi del rack. L'ampliamento a un SampleRobot funzionale avviene con l'equipaggiamento di rack dei campioni, dita di presa e postazioni di lavoro, come per es. moduli Pick&Place o pompa. La scelta di questi componenti viene effettuata in base all'applicazione.

Parti incluse 2.1012.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.1012.0020	Modulo principale Pick&Place L

Modulo principale per l'ampliamento di un OMNIS Sample Robot Pick&Place della misura L. Questo modulo è dotato di sollevamento principale e pinza. Per l'ampliamento completo sono necessari una base per modulo e due basi per rack. L'ampliamento a un Sample Robot funzionale avviene con l'aggiunta di rack dei campioni, dita di presa e postazioni di lavoro, come ad esempio i moduli Pick&Place o pompa. La scelta di questi componenti viene effettuata in base all'applicazione.



La copertura del cavo protegge i collegamenti dei cavi MDL ed Ethernet sull'OMNIS Sample Robot.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.02601.010	Dita di presa 43 - 65 mm Dita di presa per OMNIS Sample Robot Pick&Place per prendere i recipienti del campione con un diametro esterno da 43 a 65 mm.	
6.02601.020	Dita di presa 50 - 72 mm Dita di presa per OMNIS Sample Robot Pick&Place per prendere i recipienti del campione con un diametro esterno da 50 a 72 mm.	
2.1003.0010	OMNIS Dosing Module senza agitatore Modulo di dosaggio per il collegamento a un titolatore OMNIS per l'ampliamento di un'ulteriore buretta per titolazione/dosaggio. Ampliabile con un agitatore magnetico o a elica per l'utilizzo come stand di titolazione separato. Unità cilindriche a scelta libera da 5, 10, 20 o 50 mL.	
2.1014.0010	Modulo Pick&Place Modulo per l'installazione nel supporto moduli dell'OMNIS Sample Robots Pick&Place. Questa stazione di lavoro preleva il beaker per campioni per l'analisi. Tra le analisi, i sensori utilizzati vengono puliti o parcheggiati nel beaker di stoccaggio del modulo Pick&Place. Se durante l'analisi è necessaria l'agitazione, per questa stazione di lavoro deve essere utilizzato un agitatore a elica separato.	

2.1014.0110 Modulo Pick&Place con agitatore

Modulo per l'installazione nel supporto moduli dell'OMNIS Sample Robots Pick&Place. Questa stazione di lavoro preleva il beaker per campioni per l'analisi. L'agitatore magnetico integrato consente che i campioni preparati su un agitatore magnetico esterno vengano analizzati direttamente nel Sample Robot senza rimuovere prima l'agitatore. Tra le analisi, i sensori utilizzati vengono puliti o parcheggiati nel beaker di stoccaggio del modulo Pick&Place.



2.1016.0010 Modulo pompa peristaltico (2 canali)

Modulo per l'installazione nel supporto moduli dell'OMNIS Sample Robots Pick&Place. Questa stazione di lavoro è dotata di una pompa di lavaggio e di aspirazione. Vengono utilizzate per pulire i sensori in un modulo Pick&Place e per svuotare il beaker per campioni dopo l'analisi prima di rimetterlo sul rack.



2.1016.0110 Modulo pompa peristaltico (4 canali)

Modulo per l'installazione nel supporto moduli dell'OMNIS Sample Robots Pick&Place. Questa stazione di lavoro è dotata di due pompe di lavaggio e di aspirazione. Vengono utilizzate per pulire i sensori in due moduli Pick&Place e per svuotare il beaker per campioni dopo l'analisi prima di rimetterli sul rack.



6.02041.010 Rack dei campioni OMNIS, 9 x 250 mL, (PP)

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Pick&Place adatto a 9 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.01400.000, 6.01400.003, 6.01400.100.

Plastica: polipropilene (PP)



6.02041.030 Rack dei campioni OMNIS, 16 x 120 mL, (PP)

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Pick&Place adatto a 16 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.01400.200, 6.01400.300, 6.01400.303.


Plastica: polipropilene (PP)



6.02041.040 Rack dei campioni OMNIS, 25 x 75 mL, (PP)

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Pick&Place adatto a 25 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.01402.000, 6.01402.003, 6.1459.400.

Plastica: polipropilene (PP)

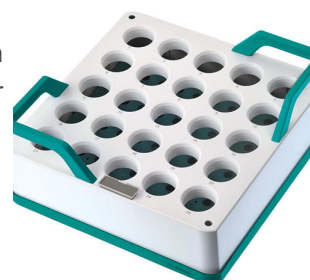

6.02001.010 Base del rack

Base del rack per l'ampliamento del modulo principale dell'OMNIS Sample Robot



6.02003.010 Base del modulo M/L

Base del modulo per l'ampliamento del modulo principale M ed L dell'OMNIS Sample Robot.



6.02041.020 Rack dei campioni OMNIS, 9 x 200 mL, (PP)

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Pick&Place adatto a 9 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.310.

Plastica: polipropilene (PP)



6.02064.020 Dispositivo di fissaggio per beaker per campioni da 200 mL

Dispositivo di fissaggio per beaker per campioni da 200 mL nelle dita di presa dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place.



6.05700.000 Consumable Kit OMNIS Gripper

Per ognuno quattro giunti scorrevoli e dita di presa in gomma per la sostituzione sulle dita di presa dell'OMNIS Sample Robot.



6.02041.050 Rack dei campioni OMNIS, 9 x 150 mL, (PP)

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Pick&Place adatto a 9 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: beaker in vetro da 150 mL (forma alta e senza beccuccio).

Plastica: polipropilene (PP)



6.02601.030 Dita di presa 48-64 mm

Dita di presa per OMNIS Sample Robot Pick&Place per prendere i recipienti del campione con un diametro esterno da 48 a 64 mm.



6.02601.040 Dita di presa 28-48 mm

Dita di presa per OMNIS Sample Robot Pick&Place per prendere i recipienti del campione con un diametro esterno da 28 a 48 mm.



6.05700.250 Consumable Kit OMNIS Gripper per 6.02601.030

Quattro dita di presa in gomma per la sostituzione sulle dita di presa dell'OMNIS Sample Robot.

