


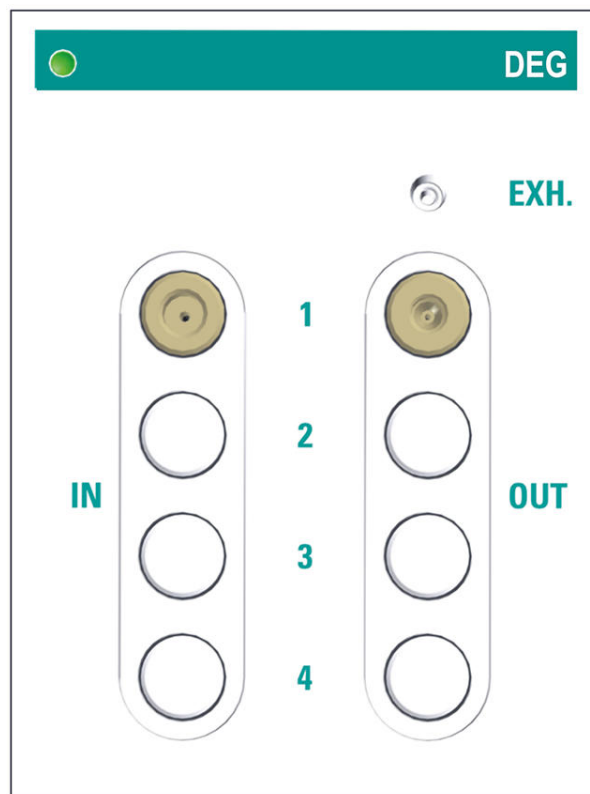

OMNIS Degasser Unit 1-Channel

2.1056.0110

L'OMNIS Degasser Unit 1-Channel serve per la rimozione automatizzata di gas disciolti e bolle d'aria dagli eluenti e dai campioni nell'OMNIS IC System. Il degasaggio dell'eluente garantisce una linea di base stabile e aumenta così la precisione della misura cromatografica. Nel caso di campioni altamente gassosi, il degasser di campioni integrato garantisce che ad ogni iniezione venga immesso un volume di campione costante nel circuito di campionamento. Ciò migliora significativamente la riproducibilità dell'analisi ed elimina completamente la necessità di degasaggio manuale. Grazie al nuovo concetto tecnico della Film Degassing Chamber, l'OMNIS Degasser Unit è notevolmente più efficiente.


L'OMNIS Degasser Unit viene integrata in modo salvaspazio nell'OMNIS Extension Module. L'OMNIS Degasser Unit 1-Channel è espandibile a 2, 3 o 4 camere. La Degasser Unit può essere equipaggiata con un massimo di 4 degasser dell'eluente (4 camere) o con 1 degasser di campioni e un massimo di 3 degasser dell'eluente.

Specifiche:

- Tempo di creazione del vuoto: 10 s
- Efficienza di degasaggio: > 150 μ L air / min a 1 mL/min
- Resistenza ai solventi: nessuna restrizione (eccetto PFC)
- Ampliabile: sì, fino a 4 canali

- Percorso di flusso: senza metallo

Parti incluse 2.1056.0110

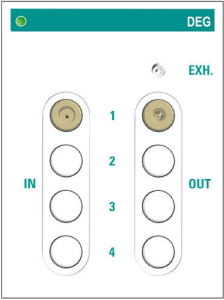Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.1056.0110	OMNIS Degasser Unit 1-Channel
		L'OMNIS Degasser Unit 1-Channel serve per la rimozione automatizzata di gas disciolti e bolle d'aria dagli eluenti e dai campioni nell'OMNIS IC System. Il degassaggio dell'eluente garantisce una linea di base stabile e aumenta così la precisione della misura cromatografica. Nel caso di campioni altamente gassosi, il degasser di campioni integrato garantisce che ad ogni iniezione venga immesso un volume di campione costante nel circuito di campionamento. Ciò migliora significativamente la riproducibilità dell'analisi ed elimina completamente la necessità di degassaggio manuale. Grazie al nuovo concetto tecnico della Film Degassing Chamber, l'OMNIS Degasser Unit è notevolmente più efficiente. L'OMNIS Degasser Unit viene integrata in modo salvaspazio nell'OMNIS Extension Module. L'OMNIS Degasser Unit 1-Channel è espandibile a 2, 3 o 4 camere. La Degasser Unit può essere equipaggiata con un massimo di 4 degasser dell'eluente (4 camere) o con 1 degasser di campioni e un massimo di 3 degasser dell'eluente.
		
1 PCS	6.01831.100	Capillare in PEEK DEG - HPP, 250/0,75 mm
		Capillare in PEEK pretagliato con etichetta per OMNIS IC 

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.05801.020	Kit canale degasser Upgrade kit per dotare l'OMNIS IC Degasser Unit di un canale di degasaggio aggiuntivo. Prerequisiti: OMNIS IC S/M/L, comprendente: • 2.1056.0010 OMNIS Degasser Unit 1-Channel o • 2.1056.0020 OMNIS Degasser Unit 2-Channel Informazione: questo upgrade deve essere installato da un responsabile del servizio di assistenza tecnica Metrohm locale autorizzato.

