



OMNIS Multi Flow Monitor Unit

2.1056.0910

L'OMNIS Multi Flow Monitor Unit serve per il monitoraggio del flusso nell'OMNIS IC System. È in grado di rilevare cambiamenti di tendenza nel comportamento del flusso. Se nell'OMNIS Software sono state definite misure adeguate, l'OMNIS IC System le esegue.

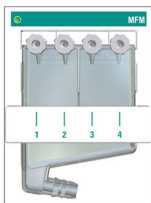
Il monitoraggio costante del flusso contribuisce a garantire il corretto funzionamento dell'intero OMNIS IC System. Le variazioni di flusso indicano un malfunzionamento, ad esempio dovuto all'usura dei tubi di pompaggio o all'intasamento della membrana di filtrazione.

I liquidi che defluiscono dall'OMNIS IC System scorrono attraverso un massimo di 4 canali nel recipiente per scarico dell'OMNIS Multi Flow Monitor Unit. Il flusso di ciascun canale può essere monitorato singolarmente e indipendentemente dagli altri canali. Se nel sistema di scarico vengono convogliati più di 4 canali, è possibile installare un recipiente per scarico aggiuntivo sul reagent organizer (senza monitoraggio del flusso).

Specifiche:

- Gamma di flusso: da 0,1 ml/min a 8 ml/min per acqua
- Numero di canali di misura: 4

Parti incluse 2.1056.0910

Order Number	Descrizione	Quantità
1.1056.0910	OMNIS Multi Flow Monitor Unit L'OMNIS Multi Flow Monitor Unit serve per il monitoraggio del flusso nell'OMNIS IC System. È in grado di rilevare cambiamenti di tendenza nel comportamento del flusso. Se nell'OMNIS Software sono state definite misure adeguate, l'OMNIS IC System le esegue. Il monitoraggio costante del flusso contribuisce a garantire il corretto funzionamento dell'intero OMNIS IC System. Le variazioni di flusso indicano un malfunzionamento, ad esempio dovuto all'usura dei tubi di pompaggio o all'intasamento della membrana di filtrazione. I liquidi che defluiscono dall'OMNIS IC System scorrono attraverso un massimo di 4 canali nel recipiente per scarico dell'OMNIS Multi Flow Monitor Unit. Il flusso di ciascun canale può essere monitorato singolarmente e indipendentemente dagli altri canali. Se nel sistema di scarico vengono convogliati più di 4 canali, è possibile installare un recipiente per scarico aggiuntivo sul reagent organizer (senza monitoraggio del flusso).	1 PCS
		
6.01808.010	Connettore per tubi a Y, PP, 3 x 7-8 mm Connettore per il tubo di scarico.	1 PCS
		

Accessori opzionali

6.01816.000

Tubo di scarico, 7/9 mm, 1 m

Tubo di scarico in silicone



6.02765.000

**Collettore scarichi, 4 x UNF 10
/32**

Recipiente per scarico per fino a quattro capillari di scarico.



6.02860.000

Barra sensore MFM

Barra sensore per l'OMNIS IC MFM Unit.



6.05801.290

Kit scarico, M



Kit dello scarico per sostituire il tubo di scarico e le connessioni nell'OMNIS IC M.

Prerequisiti:

2105100x0 OMNIS IC M

6.05801.310

Kit scarico, L



Kit dello scarico per sostituire il tubo di scarico e le connessioni nell'OMNIS IC L.

Prerequisiti:

2105200x0 OMNIS IC L