



756 KF Coulometer con elettrodo generatore con diaframma

2.756.0010

KF-Coulometer con stampante incorporata e cella di titolazione con elettrodo generatore con diaframma per la determinazione del contenuto d'acqua a livello di tracce.

Grazie alla sua affidabilità, al display grafico retroilluminato, al dialogo multilingue e al semplice funzionamento, questo coulombometro è diventato uno strumento standard in molti laboratori. Il chiaro display fornisce informazioni sui parametri di titolazione rilevanti e in modo inequivocabile sul processo di titolazione in forma di curva μg acqua contro tempo.

Intervallo di misura consigliato: da 10 μg a 200 mg acqua assoluta

Parti incluse 2.756.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.756.0010

756 KF Coulometer

KF-Coulometer con stampante incorporata



1 PCS

1.728.0010

728 Magnetic Swing-out Stirrer senza stand

Da montare su un'asta di supporto di diametro 10 mm; senza base (o supporto) e senza asta di supporto; senza adattatore, con cavo di collegamento.



1 PCS

6.0341.100

Elettrodo a doppio filo di platino per coulometria

Elettrodo indicatore utilizzato per la titolazione Karl Fischer coulometrica.



1 PCS

6.0344.100

Elettrodo generatore con diaframma

Elettrodo generatore con diaframma per titolazione Karl Fischer coulometrica, giunto conico 29/22.

Questo elettrodo generatore è indicato in particolare per:

- Campioni con contenuto assoluto di acqua molto basso 50 ppm
- Determinazione coulometrica del contenuto d'acqua in campioni di olio
- Applicazioni per cui vengono utilizzati reagenti chetonici
- Applicazioni per cui vengono utilizzati reagenti cattivi conduttori (aggiunta di cloroformio, xilene >10%)



1 PCS

6.1403.030

Tubo di essiccazione KF per cella coulometrica

Per KF-Coulometer.



1 PCS

6.1437.000

Stopper SGJ SGJ 14



1 PCS

6.1446.060

Tappo / B-14/15 / M10



2 PCS

6.1448.020

Setti da 16 mm, 5 pezzi

Set di 5 unità.





Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.



Da usare con 756, 831 KF Coulometer e 728 Magnetic Swing-out Stirrer



Per aste di supporto da 10 mm di diametro.





Supporto per cella di titolazione per celle conduttimetriche.



Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)



Con spina H. Per collegare elettrodo generatore - KF Coulometer.



1 PCS

6.2130.040

Tastiera per 756

Tastiera per 756 KF Coulometer



3 PCS

6.2237.020

Carta termica da 35 m

Sufficiente per circa 10'000 linee di stampa. Per 756 Coulometer



1 PCS

6.2241.030

Bobina di carta per carta termica



1 PCS

6.2701.040

Tappo a vite GL 18 con foro

In PBT. Con foro per il setto 6.1448.020. Per la cella senza diaframma 6.5405.000 e recipienti di titolazione 6.1464.32X e 6.1465.320.



3 PCS

6.2713.000

Manicotto in PTFE NS14

Per il collegamento del giunto privo di grasso con giunto conico NS 14.



1 PCS

6.2713.010

Manicotto in PTFE NS29

Manicotto per il collegamento del giunto privo di grasso con giunto conico NS 29.



1 PCS

6.2713.020

Manicotto in PTFE NS19

Per il collegamento del giunto privo di grasso con giunto conico NS 19.



1 PCS

6.2730.030

Tappo

Completo di ugello e o-ring. Per i coperchi della cella di titolazione 6.1414.030. Da usare con strumenti KF, VA-Stand, VA Computrace e IC Dilution.



1 PCS

6.2738.000

Imbuto

Da usare con KF Coulometer.



1 PCS

6.2811.000

Setacci molecolari

Setacci molecolari. Bottiglia contenente 250 g. Dimensione dei pori: 0.3 nm. Per Rancimat e strumenti Karl Fischer.



1 PCS

6.2816.030

Ago con raccordo Luer

Ago per il riempimento del mercurio nel Multi Mode Electrode e per l'aggiunta di campione nella titolazione Karl Fischer.



2 PCS

6.2816.090

Siringa 5 mL

Siringa 5 mL in PP, con raccordo Luer



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.860.0010	860 KF Thermoprep	
	L'860 KF Thermoprep serve per la preparazione termica dei campioni nella titolazione Karl Fischer. Molte sostanze non sono adatte per la titolazione Karl-Fischer diretta perché non sono solubili, reagiscono con il reagente KF oppure perché cedono l'acqua in essi contenuta solo molto lentamente o solo ad alte temperature. I campioni vengono inseriti nel forno in fiale per campioni chiuse ermeticamente e in seguito possono essere determinati con qualsiasi titolatore KF volumetrico o coulometrico.	
6.1464.323	Cella di titolazione KF/80 - 250 mL/coulometrica/vetro ambrato	
6.1465.320	Cella di titolazione KF con 2 aperture laterali / 80-250 mL / coulometrica Per 756 e 831 KF Coulometer	
6.2134.100	Cavo / 5 m / RS232 DB9 - IBM-PC (DB9) Per collegare interfacce Metrohm RS232 - Titrino, 756 KF Coulometer, 762 o 771 IC Interfaces, 790 Personal IC	

6.2148.000

Remote Box

Per collegare un lettore di codici a barre ed una tastiera del PC al KF Coulometer e ai Titrino



6.5406.000

Kit per KF coulometrico incluso elettrodo generatore con diaframma


Kit completo di accessori per KF Coulometer.



6.5406.010

Equipaggiamento coulometrico KF comprensivo di elettrodo generatore senza diaframma

Set completo di accessori per KF-Coulometer.

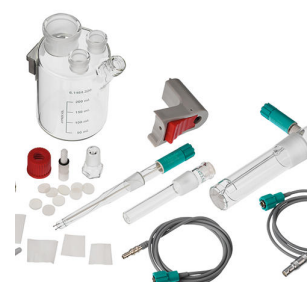

6.5617.000

Accessori per il cambio del reagente

Accessori per cambio automatico del reagente con KF Coulometer e Dosino collegato.



6.1439.010

Tubo di alimentazione e scarico KF

Tubo di alimentazione e scarico per cella coulometrica, incl. collegamento a vite M8 6.1811.010.

