



858 Professional Sample Processor VA per antiossidanti

2.858.0130

L'858 Professional Sample Processor VA per antiossidanti consente il trattamento completamente automatico di serie di campioni di lubrificanti per la determinazione della concentrazione di antiossidanti in combinazione con gli strumenti Professional VA e il software viva. Il sistema viene comandato direttamente dal software viva. Il rack dei campioni fornito in dotazione contiene 24 campioni, estratti automaticamente sul campionatore prima della determinazione, per la preparazione dei campioni.

L'858 Professional Sample Processor VA per antiossidanti viene fornito con braccio robotico integrato, compresi gli accessori, rack dei campioni, agitatore magnetico e cavo di collegamento per la creazione di una postazione di lavoro completa, ma senza le dotazioni per il lavaggio.

Parti incluse 2.858.0130

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.858.0020

858 Professional Sample Processor – Pump

L'858 Professional Sample Processor – Pump per il trattamento di campioni con volumi compresi tra 500 µL e 500 mL. Il trasferimento del campione avviene o attraverso la pompa peristaltica bidirezionale a doppio canale integrata o tramite un 800 Dosino.




1 PCS

1.741.0010

741 Magnetic Stirrer

741 Magnetic stirrer per scambiatori di campioni.

741 Magnetic Stirrer per lo scambiatore di campioni si trova sotto il cestello portacampioni.

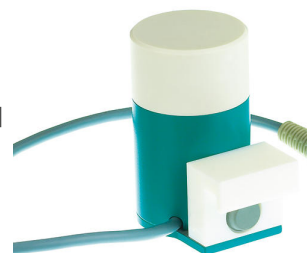

1 PCS

1.800.0040

800 Dosino (lunghezza del cavo 0,65 m)

Azionamento con hardware di scrittura/lettura per unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (lunghezza 0,65 m).



24 PCS

6.1432.210

Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL, 1 pezzo

Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 e 6.2041.900, 1 pezzo



1 PCS

6.1446.000

Stopper SGJ / B-14/(15)



1 PCS

6.1546.030

Pinza per pistone

Per pistoni delle 807 Dosing Unit o unità cilindro OMNIS.



1 PCS

6.1602.115

Sifone per bottiglia / S 40 / verde

Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura S 40 (Merck...).



1 PCS

6.1608.070

Bottiglia per eluente / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1803.020

Capillare in PTFE 0.97 mm i.d. / 5 m

Per tutti gli strumenti IC



1 PCS

6.1808.010

Accoppiatore 2 X M6

2 filettature esterne M6. Parte delle connessioni a vite per l'Unità Intercambiabile e il 676 Sample Changer



1 PCS

6.1808.050

Tubo di connessione ad oliva M8

1 filettatura esterna M8 e 1 oliva per tubi. E.g. per la camicia termostatica delle Unità Intercambiabili e degli strumenti di misura della stabilità.



1 PCS

6.1808.060

Giunto a T / M6 interno

Filettatura tripla M6 interna.



1 PCS 6.1819.080 Tubo di ingresso del gas
Per Rancimat e PVC Thermomat



1 PCS 6.1826.430 Tubo di pompaggio Tygon MHL (giallo/blu), 2 tappi
Per la determinazione di antiossidanti nella voltammetria



1 PCS 6.1829.080 Tubo di aspirazione / M6 / 0,3 m



1 PCS 6.1831.020 Capillare in PEEK 0.75 mm i.d., 22 cm
Per tutti i componenti IC



24 PCS

6.1903.010

Barra di agitazione / 12 mm

Barra d'agitazione magnetica, ricoperta in PTFE, lunghezza 12 mm.



1 PCS

6.2037.040

Fogli di protezione

Sostegno per fogli di protezione per beaker da 75 mL per Karl Fischer per KF Sample Changer



1 PCS

6.2041.340

Rack dei campioni, 24 x 75 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 24 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



1 PCS

6.2151.000

Cavo USB A – Mini-DIN a 8 poli

Cavo controller.



1 PCS

6.2621.080

Strumento di taglio per capillari

Strumento per il taglio semplice di capillari in plastica, 1/16" e 1/8", con 5 lame di ricambio incluse.



1 PCS

6.2621.090

Chiave inglese 1/2 in.

Per viti di fissaggio da 1/2 in. Per IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.100

Chiave a brugola da 3 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



1 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2744.014

Viti di fissaggio 2x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



4 PCS

6.2744.080

Adattatore filettatura M6 / UNF 10/32

Con filettatura esterna M6. Per strumenti IC.




2 PCS

6.2744.160

Accoppiatore/UNF 10/32 con dispositivo di sicurezza


Dispositivo di sicurezza per il collegamento di un tubo di pompaggio ad
un ugello

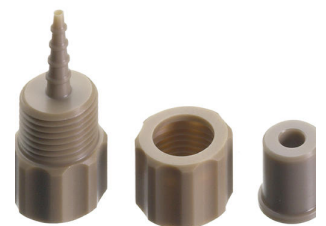

1 PCS

6.2744.290

Giunto a T 3 × UNF 10/32 con supporto

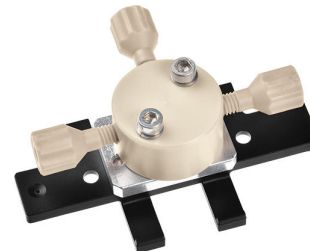


1 PCS

6.2744.350

Vite a pressione PEEK 14 mm, 3 pezzi

Con connettore UNF 10/32. Per il collegamento di capillari in PEEK del modulo Absorber.

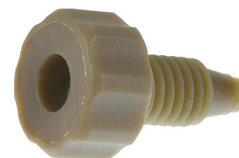

4 PCS

6.2747.010

Recipiente per campioni 50 mL

Con tappo a vite blu e graduazione mL. Set da 25 pezzi.




1 PCS

6.2751.110

Protezione dagli schizzi

Protezione dagli schizzi per Sample Processor Advanced IC/VA.

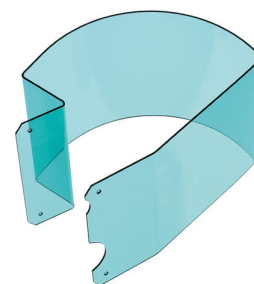

1 PCS

6.2820.000

Foglio di alluminio

1 000 fogli circolari di 80 mm di diametro. Spessore del foglio: 0,010 mm. Insieme al supporto per pellicola 6.2037.040 per il bicchiere per campioni 6.1432.210 e con il supporto per pellicola 6.2037.080 per il bicchiere per campioni 6.1459.300.



1 PCS

6.2833.020

Supporto per ago 1/8 in. Con tubo di connessione M6

Per Sample Processors. Per collegare tubi in FEP con connettori M6



1 PCS

6.2841.110

Stazione di lavaggio per equipaggiamento di pipettaggio

Stazione di lavaggio per equipaggiamento di pipettaggio



1 PCS

6.2846.010

Ago per campioni in ossido di zirconio con punta PEEK

Ago per campioni per Sample Processor e Autosampler nella cromatografia ionica. La punta in PEEK garantisce una foratura sicura della copertura del vial.



807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 20 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.

