


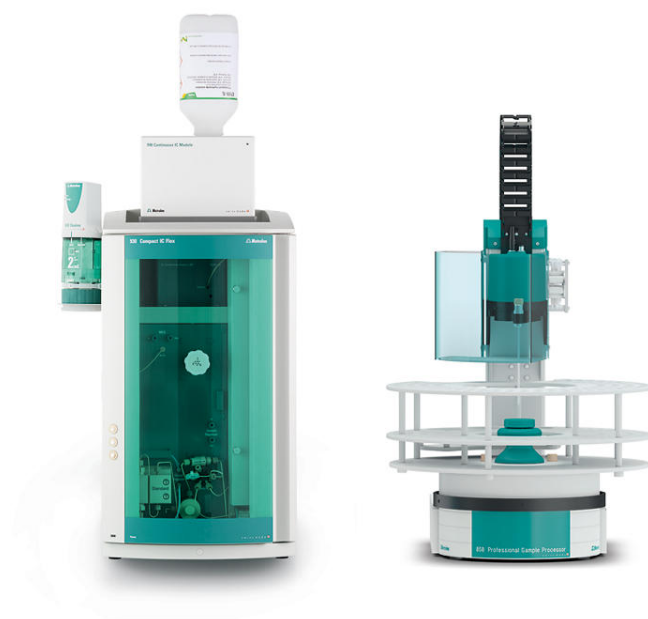

# Continuous IC Package DR

2.930.8030

Il Continuous IC Package DR consente l'analisi di anioni e con eluenti idrossidi. Comprende tutti i componenti necessari come il 930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg, l'IC Conductivity Detector MB, il 948 Continuous IC Module, il 858 Professional Sample Processor: pompa, la rigenerazione Dosino (DR) e il software MagIC Net.

## Parti incluse 2.930.8030

| Qt.   | Order no.  | Descrizione                           |
|-------|------------|---------------------------------------|
| 1 PCS | 1.800.0030 | 800 Dosino (lunghezza del cavo 1,5 m) |

Azionamento con hardware di scrittura/lettura per unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (lunghezza 1,5 m).



L'858 Professional Sample Processor – Pump per il trattamento di campioni con volumi compresi tra 500 µL e 500 mL. Il trasferimento del campione avviene o attraverso la pompa peristaltica bidirezionale a doppio canale integrata o tramite un 800 Dosino.



Il degasatore ad alta pressione assicura l'eliminazione del gas idrogeno che si crea durante la produzione dell'eluente.



La trappola anionica continua (CT-A) rimuove le impurità anioniche e il carbonato dall'eluente.



La cartuccia per la produzione dell'eluente A (EPC A) produce l'eluente idrossido ad elevata purezza dal concentrato di idrossido 4 mol/L, basato sull'elettrolisi dell'acqua. La membrana a scambio di cationi consente la migrazione selettiva di cationi nell'eluente. L'EPC A viene alimentato con acqua ultrapura che, in combinazione con un impianto di depurazione dell'acqua, può essere fatto funzionare in modo completamente automatico.




1 PCS

6.05000.300

Kit di accessori: CEP

Kit di accessori per l'installazione del 948 Continuous IC Module, CEP

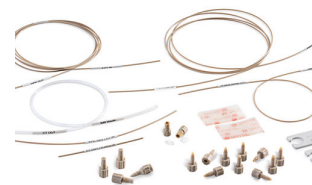

1 PCS

6.1546.030

Pinza per pistone

Per pistoni delle 807 Dosing Unit o unità cilindro OMNIS.



3 PCS

6.1608.080

Bottiglia / 300 mL

Recipiente di lavaggio per IC Sample Processors.



1 PCS

6.1803.030

Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 3 m

Capillari per dialisi in linea, per Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



2 PCS

6.1826.360

Tubi di pompaggio LFL (bianco/bianco), 3 stopper

Per Sample Processors



1 PCS

6.1831.060

Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 1 m

Per dialisi in linea e per Sample Changers. Per IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



1 PCS

6.1831.160

Capillari PEEK 0,5 mm diam. int. / 70 cm



1 PCS

6.2041.760

Rack dei campioni 54 x 11 mL + 1 x 300 mL

Rack dei campioni con diametro piccolo per recipienti per campioni 54 x 11 mL in due file e 1 x bottiglia da 300 mL.



1 PCS

6.2064.000

Beaker per Advanced IC Sample Processor

Piastra per 838 Advanced Sample Processors. Per tenere vial da 2.5 o 11 mL.



---

1 PCS

6.2151.000

Cavo USB A – Mini-DIN a 8 poli

Cavo controller.



---

1 PCS

6.2151.020

Cavo USB A - USB B 1.8 m

Cavo di collegamento USB



---

1 PCS

6.2164.010

Alimentatore di rete da tavolo 100 - 240 V/24 V DC

Alimentatore di rete da tavolo per 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer e tutti gli Eco Titrator/Eco Dosimat.



1 PCS

6.2621.300

Kit di attrezzi per Advanced IC Sample Processors

Set di attrezzi costituito da chiave inglese e chiave esagonale



---

1 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



---

1 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea  
(connessione per capillari in PEEK)



---

1 PCS

6.2744.014

Viti di fissaggio 2x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea  
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2744.034

Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 2 x

Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 2 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.



1 PCS

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.




2 PCS

6.2744.160

Accoppiatore/UNF 10/32 con dispositivo di sicurezza

Dispositivo di sicurezza per il collegamento di un tubo di pompaggio ad un ugello

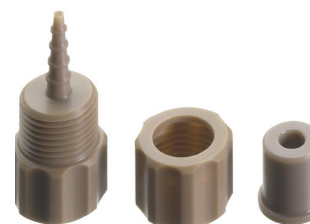


1 PCS

6.2751.110

Protezione dagli schizzi

Protezione dagli schizzi per Sample Processor Advanced IC/VA.

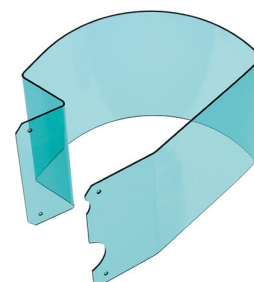

1 PCS

6.2842.100

MSM-HC Rotor A, idrossido

Rotore soppressore con elevata capacità per eluenti di idrossido per tutti gli strumenti IC con MSM-HC (Metrohm Suppressor Module con elevata capacità).



1 PCS

6.2846.010

Ago per campioni in ossido di zirconio con punta PEEK

Ago per campioni per Sample Processor e Autosampler nella cromatografia ionica. La punta in PEEK garantisce una foratura sicura della copertura del vial.



1 PCS

6.5000.000

Kit di accessori: Vario/Flex Basis

Kit di accessori di base per un Professional IC Vario o un Compact IC Flex.



1 PCS

6.5000.010

Kit di accessori: Vario/Flex ONE

Kit di accessori per modulo ONE (pompa IC con iniettore) per strumenti Professional IC Vario e Compact IC Flex.



1 PCS

6.5000.020

Kit di accessori: Vario/Flex SeS

Kit di accessori per la soppressione sequenziale (SeS) per strumenti Professional IC Vario e Compact IC Flex. Senza rotore di soppressione.




---

1 PCS

6.5330.190

Equipaggiamento IC: Dosino, rigenerazione

Kit di accessori per il montaggio di un Dosino per la rigenerazione automatica del Metrohm Suppressor Module (MSM).

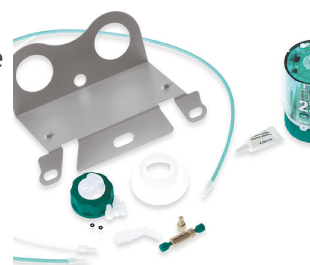

Software per cromatografia professionale di Metrohm per il comando di uno strumento Compact IC intelligente, di un rilevatore e di un autocampionatore o di un 771 Compact Interface. Il software consente il controllo, l'acquisizione, la valutazione e il monitoraggio dei dati, nonché la creazione di report delle analisi ionocromatografiche.



Interfaccia utente grafica per operazioni di routine, ampi programmi di banche dati, sviluppo di metodi, configurazione e controllo manuale del sistema; amministrazione utenti molto flessibile, operazioni su banche dati potenti, ampie funzioni di esportazione dei dati, generatore di report configurabile individualmente, controllo e monitoraggio di tutti i componenti di sistema e dei risultati della cromatografia.

MagIC Net Compact soddisfa per intero le prescrizioni FDA 21 CFR Part 11 nonché la Buona pratica di laboratorio.

MagIC Net è disponibile in 15 lingue di dialogo: tedesco, inglese, cinese, cinese tradizionale, francese, italiano, spagnolo, portoghese, bulgaro, ceco, ungherese, giapponese, coreano, russo, slovacco

Questa versione prevede un aggiornamento dell'interfaccia utente grafica che, tra le altre cose, ha migliorato il ridimensionamento e la nitidezza dell'interfaccia utente sui monitor 4K.

1 licenza.

L'installazione e i documenti vengono forniti su una chiave USB.