



930 Combustion IC PP (AJ)

2.930.9010

Il 930 Combustion IC PP (AJ) consente l'analisi di alogeni e zolfo in campioni combustibili di ogni genere grazie alla digestione per combustione (piroidrolisi) in linea con successiva determinazione mediante cromatografia ionica (Combustion IC). Comprende tutti i componenti necessari, come il Combustion Module di Analytik Jena (2.136.0700), il 920 Absorber Module, il 930 Compact IC Flex Oven/SeS/PP/Deg e il software MagIC Net. Il pacchetto 930 Metrohm Combustion IC può, all'occorrenza, essere completato con un Autosampler per campioni solidi o liquidi (Autosampler MMS 5000). L'intera analisi, incluso il campionamento e la digestione del campione, è completamente automatizzata e viene comandata interamente dal MagIC Net.

Parti incluse 2.930.9010

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.930.2560

930 Compact IC Flex Oven/SeS/PP/Deg

Il 930 Compact IC Flex Oven/SeS/PP/Deg è l'intelligente strumento Compact-IC con forno della colonna, soppressione sequenziale e pompa peristaltica per la rigenerazione del soppressore, nonché Degasser incorporato. Lo strumento può essere impiegato con qualsiasi metodo di separazione e di rilevamento.




Campi d'impiego tipici:

- Determinazione di anioni o cationi con soppressione sequenziale e rilevamento della conduttività

1 PCS

1.136.0700

Combustion Module (Oven + ABD, AJ)

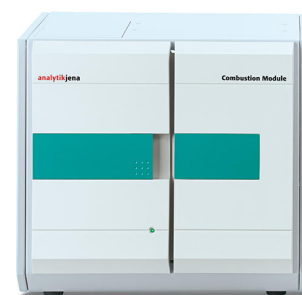

2 PCS

1.800.0040

800 Dosino (lunghezza del cavo 0,65 m)

Azionamento con hardware di scrittura/lettura per unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (lunghezza 0,65 m).



1 PCS

1.850.9010

IC Conductivity Detector

Rilevatore della conducibilità ad alte prestazioni compatto e intelligente per gli strumenti IC intelligenti. Eccellente stabilità di temperatura, la completa elaborazione del segnale all'interno del blocco del rivelatore protetto e DSP – Digital Signal Processing – di ultima generazione garantiscono la massima precisione della misura. Grazie al range dinamico di lavoro non sono necessari cambiamenti (anche non automatici) del range di misura.



Il 920 Absorber Module collega il Combustion Module con il cromatografo ionico. Il 920 Absorber Module assicura che i composti gassosi degli analiti vengano staccati e condotti all'IC. Esso è responsabile per l'intera gestione dei liquidi. Oltre che per il Combustion IC può anche essere impiegato per l'analisi dei gas.



Per l'arricchimento anionico e l'eliminazione della matrice. L'ampliamento del letto denso aumenta la capacità delle due colonne di arricchimento, interamente realizzate in PEEK. L'elevata capacità viene richiesta soprattutto quando gli effetti matrice possono causare un sovraccarico della colonna di arricchimento oppure quando devono essere analizzati campioni con elevata forza ionica.



Colonna anionica ad alta capacità che viene impiegata per la pulizia del flusso dell'eluente. Anche i reagenti del massimo livello di qualità, ad esempio «Ultrapur» o «puriss» possono ancora contenere contaminazioni anioniche minime. Tali contaminazioni vengono trattene in modo sicuro dalla colonna Metrosep A Trap 1 - 100/4,0.

Questa colonna viene impiegata soprattutto nelle applicazioni con gradiente.



La colonna Metrosep I Trap 1 - 100/4,0 viene impiegata per la rimozione di contaminazioni ioniche, vale a dire cationiche e anioniche, da soluzioni acquose. La loro applicazione è consigliabile soprattutto nell'ambito di «MISP», la «Metrohm Inline Sample Preparation», per la pulizia dell'acqua di trasferimento. Grazie all'impiego della colonna Metrosep I Trap 1 - 100/4,0 possono essere ridotti fortemente gli influssi dell'acqua di trasferimento sul vuoto di sistema.



2 PCS

6.1546.030

Pinza per pistone

Per pistoni delle 807 Dosing Unit o unità cilindro OMNIS.



1 PCS

6.1602.150

Sifone per bottiglia / GL 45 - 3 x UNF 10/32

Per collegare capillari 1/16". Da usare per le soluzioni ausiliarie dell'MSM e nella MISP.



2 PCS

6.1602.160

Sifone per bottiglia per eluenti e reagenti GL - 45

Per bottiglie di eluente, reagente e di lavaggio con connessioni per tubo di assorbimento e tubo di aspirazione.



1 PCS

6.1608.050

Bottiglia di essiccazione per KF Oven / 100 mL / GL 45



2 PCS

6.1608.070

Bottiglia per eluente / 2 L / GL 45



2 PCS

6.1609.000

Tubo di essiccazione, largo e curvo

Per riempire con materiale di assorbimento.




2 PCS

6.1618.020

Adattatore da filettatura S 40 a GL 45

Adattatore per bottiglie con filettatura S40 (Merck...) a GL45.

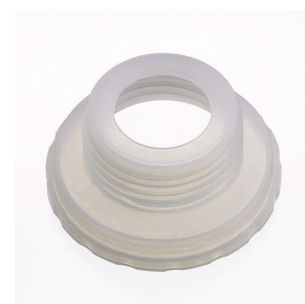

3 PCS

6.1803.030

Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 3 m

Capillari per dialisi in linea, per Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit




1 PCS

6.1803.130

Capillare 1/8 in. / 1/16 in. i.d. / 1.5 m

Capillare di connessione dalle soluzioni primarie all' Eluent Synthesizer

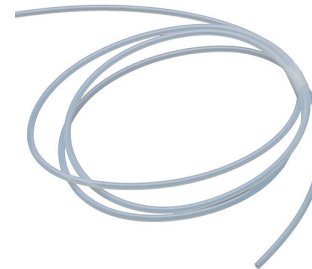

4 PCS

6.1803.160

Capillari PTFE 0,75 mm diam. int./3 m

Capillari PTFE per l'utilizzo nel 920 Absorber Module.



2 PCS

6.1805.040

Tubo in FEP / M6 / 9 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1808.060

Giunto a T / M6 interno

Filettatura tripla M6 interna.



1 PCS

6.1808.280

Adattatore per la porta 4 dell'807 Dosing Unit, M6
interno

Adattatore per l'utilizzo della porta 4 dell'807 Dosing Unit per il
collegamento con un tubo in FEP/M6.



2 PCS

6.1816.080

Tubo in silicone diam. int. 6 mm / 2 m

Tubo di drenaggio per il «Waste Collector».



1 PCS

6.1825.290

Loop di campionamento in PEEK 250 µL

Loop di campionamento per «Metrohm intelligent Partial Loop
Technique (MiPT) e per PILS (particle into liquied sampler). Mit 2 viti a
pressione in PEEK.




1 PCS

6.1826.420

Tubo di pompaggio PharMed® (arancio/giallo) 3 tappi

Per la rigenerazione MSM con pompa peristaltica.

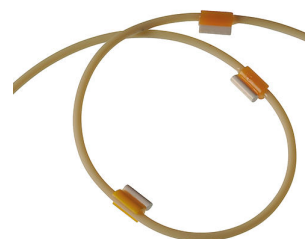

1 PCS

6.1831.040

Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 15 cm


Per dialisi in linea. Per IC Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



2 PCS

6.1838.020

Tubo di connessione in FEP per Absorber Module, M6, 150 cm

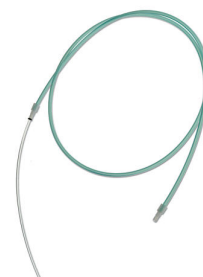

2 PCS

6.2023.020

Clip per SGJ 14/15

Clip per SGJ 14/16



2 PCS

6.2057.230

Supporto per Dosino per Absorber Module

Supporto per il fissaggio di Dosino all'Absorber Module



1 PCS

6.2151.020

Cavo USB A - USB B 1.8 m

Cavo di collegamento USB



1 PCS

6.2251.000

Fascetta per la marcatura di capillari

Parti di tubi restringibili colorati per marcare capillari. Per ognuno tre pezzi di cinque colori diversi.



1 PCS

6.2421.000

Tubo assorbitore per il modulo Absorber

Tubo assorbitore per l'assorbimento dai gas di combustione dal Combustion Module.



1 PCS

6.2621.080

Strumento di taglio per capillari

Strumento per il taglio semplice di capillari in plastica, 1/16" e 1/8", con 5 lame di ricambio incluse.



3 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2744.014

Viti di fissaggio 2x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2744.034

Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 2 x

Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 2 pezzi. Per
apparecchiature IC con pompa peristaltica.



3 PCS

6.2744.080

Adattatore filettatura M6 / UNF 10/32

Con filettatura esterna M6. Per strumenti IC.



4 PCS

6.2744.090

Viti di fissaggio lunghe

Versione lunga. Con connessione UNF 10/32. 2 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK. Per strumenti IC.



1 PCS

6.2744.170

Viti di fissaggio in PEEK UNF 1/4-28, 3 pezzi

Per fissare i capillari di connessione delle soluzioni di partenza dell' Eluent Synthesizer



1 PCS

6.2744.180

Connessione per tubo di pompaggio con blocco di sicurezza e filtro

Per la connessione di un tubo di pompaggio e di un capillare con filtro integrato



1 PCS

6.2744.200

Adattatore con filettatura esterna UNF 10/32, interna M6

Raccordo di connessione tra capillari in PEEK 1/16 in. E tubi di trasferimento (M6)



8 PCS

6.2744.220

Tappi a vite 10/32 lunghi

Per strumenti Professional IC. Per sigillare le porte non utilizzate del modulo dei degasaggio e dell'MCS.




2 PCS

6.2744.350

Vite a pressione PEEK 14 mm, 3 pezzi

Con connettore UNF 10/32. Per il collegamento di capillari in PEEK del modulo Absorber.

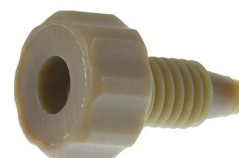

1 PCS

6.2766.000

Supporto per tubo dell'assorbitore

Supporto per il fissaggio del tubo dell'assorbitore nell'Absorber Module



1 PCS

6.2766.010

Supporto per valvola d'aspirazione

Supporto per valvola d'aspirazione per l'Absorber Module



1 PCS

6.2824.170

Valvola di entrata in PEEK

Valvola di ritegno senza metallo per il lato in entrata delle teste delle pompe IC degli apparecchi 940, 930, 925, 883, 882, 881 e 850.



1 PCS

6.2832.000

Rotore MSM A

Rotore del soppressore per tutti gli strumenti IC con MSM



1 PCS

6.2842.020

Giunto adattatore, MSM

Con il giunto adattatore possono essere installati nella cassa del rotore sia l'MSM Rotor A che l'MSM-LC Rotor A.



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 5 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 10 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



Kit di accessori di base per un Professional IC Vario o un Compact IC Flex.



Kit di accessori per modulo ONE (pompa IC con iniettore) per strumenti Professional IC Vario e Compact IC Flex.



Kit di accessori per la soppressione sequenziale (SeS) per strumenti Professional IC Vario e Compact IC Flex. Senza rotore di soppressione.



Software per cromatografia professionale di Metrohm per il comando di uno strumento Compact IC intelligente, di un rilevatore e di un autocampionatore o di un 771 Compact Interface. Il software consente il controllo, l'acquisizione, la valutazione e il monitoraggio dei dati, nonché la creazione di report delle analisi ionocromatografiche.



Interfaccia utente grafica per operazioni di routine, ampi programmi di banche dati, sviluppo di metodi, configurazione e controllo manuale del sistema; amministrazione utenti molto flessibile, operazioni su banche dati potenti, ampie funzioni di esportazione dei dati, generatore di report configurabile individualmente, controllo e monitoraggio di tutti i componenti di sistema e dei risultati della cromatografia.

MagIC Net Compact soddisfa per intero le prescrizioni FDA 21 CFR Part 11 nonché la Buona pratica di laboratorio.

MagIC Net è disponibile in 15 lingue di dialogo: tedesco, inglese, cinese, cinese tradizionale, francese, italiano, spagnolo, portoghese, bulgaro, ceco, ungherese, giapponese, coreano, russo, slovacco

Questa versione prevede un aggiornamento dell'interfaccia utente grafica che, tra le altre cose, ha migliorato il ridimensionamento e la nitidezza dell'interfaccia utente sui monitor 4K.

1 licenza.

L'installazione e i documenti vengono forniti su una chiave USB.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.7301.000	Tubo di combustione (AJ)
------------	--------------------------

Tubo di combustione in quarzo per il Combustion Module.



6.7301.100	Tubo di guida per ABD (vecchio)
------------	---------------------------------

Tubo di guida per Automatic Boat Driver del Combustion Module (fino ad ABD con numero di serie 1709 590).



6.7301.110	Gancio per ABD
------------	----------------

Ganci in vetro di quarzo per navicelle in vetro di quarzo nell'Automatic Boat Driver del Combustion Module.



6.7301.140	Setto 12,5 mm
------------	---------------

Setto per porta dei campioni liquidi, 5 unità.



6.7301.150

Materiale di supporto in quarzo per campioni liquidi

Materiale di supporto per iniezione di campioni liquidi, 3 pezzi.



6.7301.160

Siringa di dosaggio manuale 100 µL

Siringa di dosaggio manuale per l'iniezione manuale di campioni liquidi



6.7301.170

O-Ring 14 x 4 mm per ABD


Anello di tenuta per il collegamento ABD per il tubo in vetro di quarzo



6.7301.180

Finger Tight Set 1/8 in.

Finger Tight per il collegamento del gas all'Automatic Boat Driver

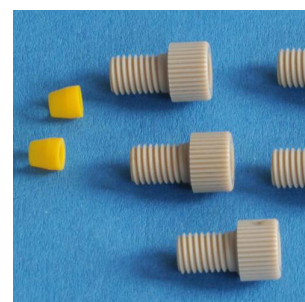

6.7301.190 Guarnizione camera di decompressione per ABD

Guarnizione per la camera di decompressione sull'Automatic Boat Driver.



6.7301.210 Connettore a T CIC

Connettore a T sull'uscita del forno per l'alimentazione della soluzione di assorbimento



6.7301.220 Morsetto filo per molle 7,3 -7,8 mm

Morsetto filo per molle per connettore rapido



6.7301.230 Cannula antiritorno Combustion IC

Cannula antiritorno per la protezione del gas box



6.7301.240 Sussidio d'infilaggio 1/16 in. Tubo flessibile Combustion IC

Sussidio d'infilaggio per capillari in connettore FAST



6.7301.250 Sensore di fiamma

Sensore di fiamma per la combustione dei campioni completamente automatica



6.7302.000 Kit per solidi per MMS 5000, 35 posizioni

Kit per solidi per MMS 5000 con supporto per solidi, pinza e 10 navicelle in vetro di quarzo.




6.7302.100 Navicella di quarzo 40 x 9 mm (AJ)

Navicella di quarzo per campionamenti nel Combustion Module, 10 unità.



6.7302.110 Quarzvia, 6 x 18 mm, per CIC, 50 pezzi

Provette di campionamento in quarzo per la combustione IC. Le provette vengono utilizzate quando i campioni contengono cationi alcalini e/o cationi alcalino-terrosi che potrebbero danneggiare la provetta di combustione in quarzo. Questi cationi reagiscono con il quarzo della provetta e vengono tenuti lontani dalla provetta di combustione. I campioni vengono fissati con lana di quarzo (6.7302.120) nella provetta.

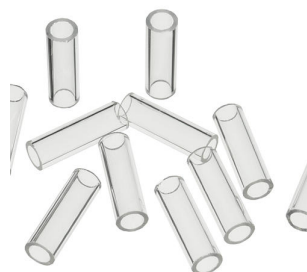

6.7302.120 Lana di quarzo per 6.7302.110, 10 g

Lana di quarzo per fissare il campione nella provetta in quarzo (6.7302.110).




6.7302.130 Navetta in ceramica 40 x 9 mm (AJ)

Navetta in ceramica per il campionamento nel Combustion Module, 10 pezzi.



6.7302.200 Pinza per navicella

Pinza per setup dell'unità di ricambio del solido MMS 5000

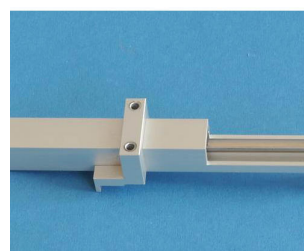

6.7303.000 Kit per liquidi per MMS 5000, 112 posizioni

Kit per liquidi per MMS 5000 con supporto per liquidi, siringa da 100 μ L con ago sostituibile e 100 vials con collo crimp.



6.7303.100 Vial vetro, 1,8 ml, forma a U, 100 pezzi

Ottimizza il recupero del campione con questo vial con anello a scatto universale da 1,8 mL progettato per applicazioni analitiche a basso volume.


Quantità: 100 pezzi



6.7303.110 Tappo a scatto con setto rosso, 100 pezzi

Tappo a scatto con setto per vial da 11 mm. Garantisce una tenuta affidabile e un'ampia compatibilità chimica per le analisi di routine in laboratorio.

Quantità: 100 pezzi

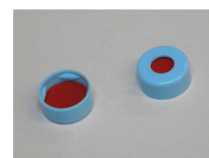

6.7303.200 Siringa 50 μ L con ago sostituibile

Siringa di ricambio per MMS 5000 Setup per liquidi



6.7303.210

Siringa 100 μ L con ago sostituibile

Siringa di ricambio per MMS 5000 Setup per liquidi



6.7303.220

Aghi per siringhe 50 μ L/100 μ L, 3 pezzi

Ago di ricambio per siringhe per setup liquidi MMS 5000



6.7303.240

Setto per recipiente di lavaggio

Setto per recipiente di lavaggio nel kit per liquidi per MMS 5000



6.7303.250

Setto per il recipiente degli scarti

Setto per il recipiente degli scarti nell'MMS 5000 (2.136.0800).



6.7304.000

Connettore FAST angolato

Per collegamenti al tubo in vetro di quarzo



6.7304.010

Connettore FAST diritto

Per collegamenti al tubo in vetro di quarzo



6.7304.020

Tubo di collegamento per ossigeno/argon 2m

Tubo di collegamento per l'alimentazione del gas al Combustion Module



6.7304.030

Dispositivo di accoppiamento Oven per LPG/GSS (AJ)

Dispositivo per il collegamento del LPG/GSS Module (AJ) al forno di combustione. Per Metrohm Combustion IC




6.7305.010 Raccordo a vite completo per recipiente a gorgogliamento.

Raccordo a vite per il fissaggio sul recipiente a gorgogliamento.



6.7305.020 Setto forato per tubo di ingresso del gas PEEK

Setto forato per il trasferimento del gas di misurazione tramite serranda ABD.

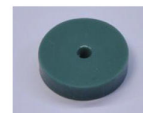

6.7305.030 Tubo di ingresso del gas PEEK per GSS/LPG

Tubo flessibile in PEEK realizzato attraverso il setto forato 6.730.5020.



6.7305.040 Filtro 0,5 µm per unità filtrante LPG

0,5 µm filtro particolare sul connettore LPG.



6.7305.050 Collegamento a T per modulo LPG/GSS

Collegamento a T con due tubi di collegamento 6/4 mm, 10 cm e 70 cm



6.7305.060 Filtro 40 µm per unità filtrante GSS

Filtro particolare 40 µm per modulo GSS




6.7301.200 Tubo di guida per ABD (nuovo)

Tubo di guida per Automatic Boat Driver del Combustion Module (ABD con numero di serie a partire da 1709591)




6.5330.190 Equipaggiamento IC: Dosino, rigenerazione

Kit di accessori per il montaggio di un Dosino per la rigenerazione automatica del Metrohm Suppressor Module (MSM).

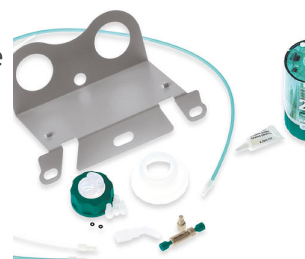

6.7303.310 Rack dei campioni con 112 posizioni per campioni liquidi

Per campioni liquidi.

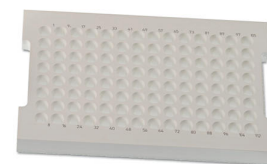

6.7302.310 Rack dei campioni con 35 posizioni per campioni solidi

Per sostanze solide.



6.6059.406 Upgrade di MagIC Net 4.x Compact a MagIC Net 4.x Professional: 1 licenza

Estensione del programma di MagIC Net Compact a MagIC Net Professional.



6.6059.407 Upgrade di MagIC Net 4.x Compact a MagIC Net 4.x Multi: 3 licenze

Estensione del programma da MagIC Net Compact a MagIC Net Multi.



Software per cromatografia professionale di Metrohm per il comando di uno strumento Compact IC intelligente, di un rilevatore e di un autocampionatore o di un 771 Compact Interface. Il software consente il controllo, l'acquisizione, la valutazione e il monitoraggio dei dati, nonché la creazione di report delle analisi ionocromatografiche.



Interfaccia utente grafica per operazioni di routine, ampi programmi di banche dati, sviluppo di metodi, configurazione e controllo manuale del sistema; amministrazione utenti molto flessibile, operazioni su banche dati potenti, ampie funzioni di esportazione dei dati, generatore di report configurabile individualmente, controllo e monitoraggio di tutti i componenti di sistema e dei risultati della cromatografia.

MagIC Net Compact soddisfa per intero le prescrizioni FDA 21 CFR Part 11 nonché la Buona pratica di laboratorio.

MagIC Net è disponibile in 15 lingue di dialogo: tedesco, inglese, cinese, cinese tradizionale, francese, italiano, spagnolo, portoghese, bulgaro, ceco, ungherese, giapponese, coreano, russo, slovacco

Questa versione prevede un aggiornamento dell'interfaccia utente grafica che, tra le altre cose, ha migliorato il ridimensionamento e la nitidezza dell'interfaccia utente sui monitor 4K.

1 licenza.

L'installazione e i documenti vengono forniti su una chiave USB.

Software per cromatografia professionale di Metrohm per il controllo di tutti i sistemi Professional IC intelligenti, gli strumenti Compact IC e le relative periferiche, di tutti i rilevatori e dei vari autocampionatori, 800 Dosino, 771 Compact Interface ecc. Il software consente il controllo, l'acquisizione, la valutazione e il monitoraggio dei dati, nonché la creazione di report delle analisi ionocromatografiche.



Interfaccia utente grafica per operazioni di routine, ampi programmi di banche dati, sviluppo di metodi, configurazione e controllo manuale del sistema; amministrazione utenti molto flessibile, operazioni su banche dati potenti, ampie funzioni di esportazione dei dati, generatore di report configurabile individualmente, controllo e monitoraggio di tutti i componenti di sistema e dei risultati della cromatografia.

MagIC Net Professional soddisfa per intero le prescrizioni FDA 21 CFR Part 11 nonché la Buona pratica di laboratorio.

MagIC Net è disponibile in 15 lingue di dialogo: tedesco, inglese, cinese, cinese tradizionale, francese, italiano, spagnolo, portoghese, bulgaro, ceco, ungherese, giapponese, coreano, russo, slovacco

Questa versione prevede un aggiornamento dell'interfaccia utente grafica che, tra le altre cose, ha migliorato il ridimensionamento e la nitidezza dell'interfaccia utente sui monitor 4K.

1 licenza

L'installazione e i documenti vengono forniti su una chiave USB.

Software per cromatografia con funzionalità Client/Server di Metrohm per il controllo di tutti i sistemi Professional IC intelligenti, gli strumenti Compact IC e le relative periferiche, di tutti i rilevatori e dei vari autocampionatori, 800 Dosino, 771 Compact Interface ecc.

Il software consente il controllo, l'acquisizione, la valutazione e il monitoraggio dei dati, nonché la creazione di report delle analisi ionocromatografiche.

I dati e i metodi vengono memorizzati a livello centrale sul Server.

Interfaccia utente grafica per operazioni di routine, ampi programmi di banche dati, sviluppo di metodi, configurazione e controllo manuale del sistema; amministrazione utenti molto flessibile, operazioni su banche dati potenti, ampie funzioni di esportazione dei dati, generatore di report configurabile individualmente, controllo e monitoraggio di tutti i componenti di sistema e dei risultati della cromatografia.

MagIC Net Multi soddisfa per intero le prescrizioni FDA 21 CFR Part 11 nonché la Buona pratica di laboratorio.

MagIC Net è disponibile in 15 lingue di dialogo: tedesco, inglese, cinese, cinese tradizionale, francese, italiano, spagnolo, portoghese, bulgaro, ceco, ungherese, giapponese, coreano, russo, slovacco

Questa versione prevede un aggiornamento dell'interfaccia utente grafica che, tra le altre cose, ha migliorato il ridimensionamento e la nitidezza dell'interfaccia utente sui monitor 4K.

Sono state inoltre migliorate le prestazioni per i sistemi Client-Server con i Server esterni alla rete aziendale interna.

Versione Client/Server con 3 licenze



2.948.0010

948 Continuous IC Module, CEP

Il 948 Continuous IC Module consente di produrre in modo automatizzato gli eluenti di idrossido. Possono essere prodotti sia eluenti isocratici che gradienti.

Il 948 Continuous IC Module, CEP è costituito dai seguenti componenti:

- 948 Continuous IC Module
- Eluent Producer Cartridge (EPC, 6.02850.200)
- Trappola anionica continua (CT, 6.02850.100)
- Degasatore ad alta pressione (H-DEG, 6.02850.000)

Metodi di esempio secondo il manuale 948 Continuous IC Module.



6.2842.100

MSM-HC Rotor A, idrossido

Rotore soppressore con elevata capacità per eluenti di idrossido per tutti gli strumenti IC con MSM-HC (Metrohm Suppressor Module con elevata capacità).



6.7301.300

Tubo di combustione in ceramica CIC AJ, completo

Tubo di combustione in ceramica per il Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.310

Tubo esterno, tubo di combustione in ceramica AJ

Tubo esterno del tubo di combustione in ceramica per il Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.320

Tubo di collegamento, tubo di combustione in ceramica AJ

Tubo di collegamento del tubo di combustione in ceramica per il Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.330

Inserto in ceramica, tubo di combustione in ceramica AJ

Inserto in ceramica del tubo di combustione in ceramica per il Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.340

Fritta, tubo di combustione in ceramica AJ

Fritta del tubo di combustione in ceramica per il Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.350

Vite d'arresto, tubo di combustione in ceramica AJ

Vite d'arresto del tubo di combustione in ceramica per il Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.360

Dado a risvolto, tubo di combustione in ceramica AJ

Dado a risvolto del tubo di combustione in ceramica per il Combustion Module (Oven + ABD, AJ).

