



Metrosep Carb 2 - 100/2,0

6.01090.210

La colonna IC Metrosep Carb 2 - 100/2,0 è la variante corta microbore delle colonne Metrosep Carb 2 ed è particolarmente adatta per la determinazione di carboidrati utilizzando eluenti alcalini e rivelazione amperometrica pulsata. La colonna di scambio anionico altamente capacitiva è basata su un copolimero di stirene/divinilbenzene. È stabile nell'intervallo di pH da 0 a 14 e separa glucosio, fruttosio e saccarosio. Inoltre, è adatta anche per l'analisi di alcuni alcoli degli zuccheri e oligosaccaridi. Sulla variante 100 mm della colonna di separazione Metrosep Carb 2 è possibile ottenere dei tempi di analisi brevi.

Grazie alla ridotta portata di eluente, questa colonna è particolarmente adatta per l'accoppiamento IC-MS.

Parti incluse 6.01090.210

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

2 PCS

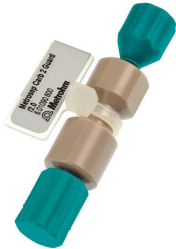
6.2744.060

Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.01090.600	Metrosep Carb 2 Guard/2,0	
	La precolonna microbore Metrosep Carb 2 Guard/2,0 rimuove i contaminanti in modo efficace e, pertanto, protegge la colonna di separazione. Il design della precolonna è scelto in modo da rendere trascurabile il suo influsso sulla separazione cromatografica.	
6.01806.000	Capillari PEEK 0,18 mm diam. int./2 m	
	Per l'impiego nel percorso del flusso ad alta pressione, ad es. come capillari di preriscaldamento per colonne Metrosep Carb 2 nella versione da 2 mm (6.01090.2x0).	
6.1015.200	Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4,0	
	Colonna Trap per la rimozione dall'eluente delle impurità da borato. La colonna Metrosep BO ₃ Trap 1 - 100/4,0 viene impiegata prevalentemente nell'analisi dei carboidrati con eluente idrossido.	
6.1015.300	Metrosep CO3 Trap 1 - 100/4,0	
	Colonna Trap per la rimozione di tracce di carbonato in eluenti idrossido.	