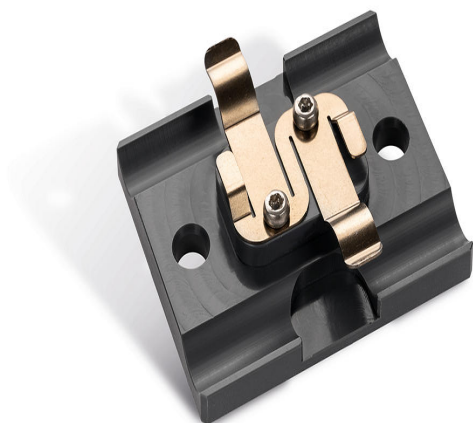




Supporto per MISP, colonna trappola

6.02006.110

Supporto per il fissaggio di colonne Trap nella OMNIS MISP Unit.

Accessori opzionali

6.1014.000

Metrosep A Trap 1 - 100/4,0



Colonna anionica ad alta capacità che viene impiegata per la pulizia del flusso dell'eluente. Anche i reagenti del massimo livello di qualità, ad esempio «Ultrapur» o «puriss» possono ancora contenere contaminazioni anioniche minime. Tali contaminazioni vengono trattene in modo sicuro dalla colonna Metrosep A Trap 1 - 100/4,0.

Questa colonna viene impiegata soprattutto nelle applicazioni con gradiente.

6.1014.100

Metrosep RP Trap 1 - 50/4,0



La colonna Metrosep RP Trap 1 - 50/4,0 viene utilizzata per la rimozione di contaminanti organici dall'eluente. La colonna Metrosep RP Trap 1 - 50/4,0 aiuta ad evitare disturbi nella linea base dovuti all'eluente soprattutto nei sistemi con gradiente. Se ne raccomanda l'utilizzo anche per la pulizia dell'eluente p-cianofenolo delle colonne di separazione Metrosep Dual 4.

6.1014.150

Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0



La colonna Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0 viene utilizzata per la rimozione di contaminanti organici dall'eluente. La colonna Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0 aiuta ad evitare disturbi nella linea base dovuti all'eluente soprattutto nei sistemi con gradiente. È basata su un materiale polimerico. In questo modo la Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0 può essere impiegata sia nel campo pH acido sia basico.

6.1014.200

Metrosep I Trap 1 - 100/4,0

La colonna Metrosep I Trap 1 - 100/4,0 viene impiegata per la rimozione di contaminazioni ioniche, vale a dire cationiche e anioniche, da soluzioni acquose. La loro applicazione è consigliabile soprattutto nell'ambito di «MISP», la «Metrohm Inline Sample Preparation», per la pulizia dell'acqua di trasferimento. Grazie all'impiego della colonna Metrosep I Trap 1 - 100/4,0 possono essere ridotti fortemente gli influssi dell'acqua di trasferimento sul vuoto di sistema.

6.1015.000

Metrosep C Trap 1 - 100/4,0

Colonna cationica ad alta capacità che viene impiegata per la pulizia del flusso dell'eluente. Anche i reagenti del massimo livello di qualità, ad es. «Ultrapur» o «puriss», possono contenere ancora minime contaminazioni cationiche. Tali contaminazioni vengono tenute lontane in modo sicuro dalla colonna Metrosep C Trap 1 - 100/4,0.

6.1015.200

Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4,0

Colonna Trap per la rimozione dall'eluente delle impurità da borato. La colonna Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4,0 viene impiegata prevalentemente nell'analisi dei carboidrati con eluente idrossido.

6.1015.300

Metrosep CO₃ Trap 1 - 100/4,0

Colonna Trap per la rimozione di tracce di carbonato in eluenti idrossido.