



Coperchio del contenitore di diluizione


6.02762.110

Coperchio per il contenitore di diluizione dell'OMNIS IC Autosampler o dell'OMNIS IC Autosampler COOL.

Accessori opzionali

2.1054.0010

OMNIS IC Autosampler Module

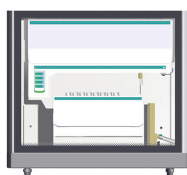

L'OMNIS IC Autosampler automatizza il cambio del campione nell'OMNIS IC System e consente l'elaborazione efficiente di fino a 160 vial da 5 ml ciascuna, a seconda del rack selezionato. Essendo il primo autocampionatore completamente integrato della nuova generazione OMNIS IC, è installato di serie direttamente sotto l'OMNIS IC. Non si tratta di uno strumento stand-alone, ma di una parte integrante dell'OMNIS IC System, che viene controllato comodamente tramite l'OMNIS Software.

Caratteristiche principali:

- Ingombro ridotto: può essere collocato direttamente sotto l'OMNIS IC
- Elevato numero di campioni: 96 vial da 10 mL, 160 vial da 5 mL, 192 vial HPLC da (1500, 700, 300) μ L, 384 pozzetti da 2 mL (piastra deep well)
- Alta velocità (30 s/iniezione di 5 μ L)
- Vassoio autocampionatore rimovibile per facilitare le operazioni di carico e scarico
- Illuminazione interna per facilitare le operazioni di carico e scarico
- Guida dell'ago xyz rapida e precisa con rilevamento vial automatico
- Luce di accompagnamento e status display per la tracciabilità visiva del movimento dell'ago e lo stato dell'autocampionatore
- Elevata flessibilità per diversi contenitori portacampione e tipi di rack (inclusi i rack personalizzati)
- Sei posizioni integrate per bottiglie da 50 mL, ad es. per standard o soluzioni di lavaggio
- Stazione di lavaggio integrata e rilevazione delle perdite di serie per la massima sicurezza
- Completamente integrato nell'OMNIS Software
- Upgrade opzionali: valvole a 3/2 vie, postazione di diluizione, lettore di codice a barre

2.1054.0020

**OMNIS IC Autosampler
Module COOL**



L'OMNIS IC Autosampler COOL automatizza il cambio del campione nell'OMNIS IC System e consente l'elaborazione efficiente di fino a 160 vial da 5 ml ciascuna, a seconda del rack selezionato. Inoltre, l'OMNIS IC Autosampler COOL offre la possibilità di controllare in modo preciso la temperatura nell'intervallo compreso tra 4 °C e 22 °C, consentendo il raffreddamento di un gran numero di campioni#. La funzione di raffreddamento è ideale per campioni termicamente instabili e rilevanti dal punto di vista biochimico, ad esempio nell'analisi di acidi organici, acidi acetici alogenati, aminoacidi e carboidrati.

Caratteristiche principali:

- Ingombro ridotto: può essere collocato direttamente sotto l'OMNIS IC
- Controllo della temperatura da 4 °C a 22 °C
- Elevato numero di campioni, grande quantità di campioni raffreddabili: 96 vial da 10 mL, 160 vial da 5 mL, 192 vial HPLC da (1500, 700, 300) µL, 384 pozzetti da 2 mL (piastra deep well)
- Alta velocità (30 s/iniezione di 5 µL)
- Vassoio autocampionatore rimovibile per facilitare le operazioni di carico e scarico
- Illuminazione interna per facilitare le operazioni di carico e scarico
- Guida dell'ago xyz rapida e precisa con rilevamento vial automatico
- Luce di accompagnamento e status display per la tracciabilità visiva del movimento dell'ago e lo stato dell'autocampionatore
- Elevata flessibilità per diversi contenitori portacampione e tipi di rack (inclusi i rack personalizzati)
- Sei posizioni integrate per bottiglie da 50 mL, ad es. per standard o soluzioni di lavaggio
- Stazione di lavaggio integrata e rilevazione delle perdite di serie per la massima sicurezza
- Completamente integrato nell'OMNIS Software
- Upgrade opzionali: valvole a 3/2 vie, postazione di diluizione, lettore di codice a barre

6.02762.100

Contenitore di diluizione

Contenitore di miscelazione per la diluizione in linea per l'OMNIS IC Autosampler e l'OMNIS IC Autosampler COOL.

