



Equipaggiamento OMNIS IC: rig. PP

6.05332.040

Set di accessori per rigenerazione MSM con Peristaltic Pump Unit.

Prerequisiti:

OMNIS IC S/M/L, comprendente:

– canale OMNIS Peristaltic Pump Unit disponibile

Parti incluse 6.05332.040

Order Number	Descrizione	Quantità
6.02837.040	Tubo per filtro Tubo per filtro con adattatore Luer; protegge eluenti e reattivi dalle particelle.	1 PCS
		
6.05000.010	Kit di accessori: bottiglia OMNIS IC, PP, 2 L Set di accessori OMNIS IC per l'installazione della bottiglia di reattivo sul Reagent Organizer/Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		
6.2744.034	Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 2 x Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 2 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.	1 PCS
		

6.01803.110

Capillare in PTFE RO - PP, 900/0,5 mm

1 PCS

Capillare in PTFE pretagliato con etichetta per OMNIS IC



6.01826.010

Tubo pompa, DI 0,5 mm, arancione - giallo

1 PCS


Tubo di pompaggio con un diametro interno di 0,5 mm da usare con la Peristaltic Pump Unit nell'OMNIS IC System. Il tubo consente il trasporto controllato e affidabile di liquidi, ad esempio per la dialisi, la rigenerazione del soppressore o soluzioni PCR. È progettato per prestazioni di flusso costanti durante il funzionamento. Le proprietà del suo materiale supportano un funzionamento stabile in condizioni analitiche di routine.



Accessori opzionali

2.1056.1010

OMNIS Peristaltic Pump Unit 1-Channel

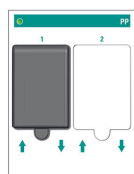

L'OMNIS Peristaltic Pump Unit serve da pompa peristaltica nell'OMNIS IC System, che alimenta i campioni e le soluzioni ausiliarie.

Lavora secondo il principio di spostamento, vale a dire che i liquidi vengono spinti attraverso il tubo di pompaggio mediante una deformazione meccanica esterna dello stesso. Il tubo di pompaggio viene deformato mediante pressione su una testa rotante.


La pompa peristaltica a 1 canale può essere ampliata a una pompa peristaltica a 2 canali, in cui entrambi i canali possono funzionare a velocità diverse.

Specifiche:

- Numero di canali: 1 (ampliabile a 2)
- Incremento della velocità: 2,5 giri/min
- Velocità minima: 2,5 giri/min
- Velocità massima: 250 giri/min
- Direzione di rotazione: senso orario

2.1056.1020

OMNIS Peristaltic Pump Unit 2-Channel

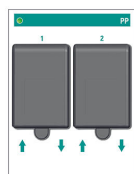

L'OMNIS Peristaltic Pump Unit serve da pompa peristaltica nell'OMNIS IC System, che alimenta i campioni e le soluzioni ausiliarie.

Lavora secondo il principio di spostamento, vale a dire che i liquidi vengono spinti attraverso il tubo di pompaggio mediante una deformazione meccanica esterna dello stesso. Il tubo di pompaggio viene deformato mediante pressione su una testa rotante.

I due canali possono essere fatti funzionare indipendentemente l'uno dall'altro a velocità diverse, aumentando così la flessibilità per le applicazioni più disparate.

Specifiche:

- Numero di canali: 2
- Incremento della velocità: 2,5 giri/min
- Velocità minima: 2,5 giri/min
- Velocità massima: 250 giri/min
- Direzione di rotazione: senso orario