


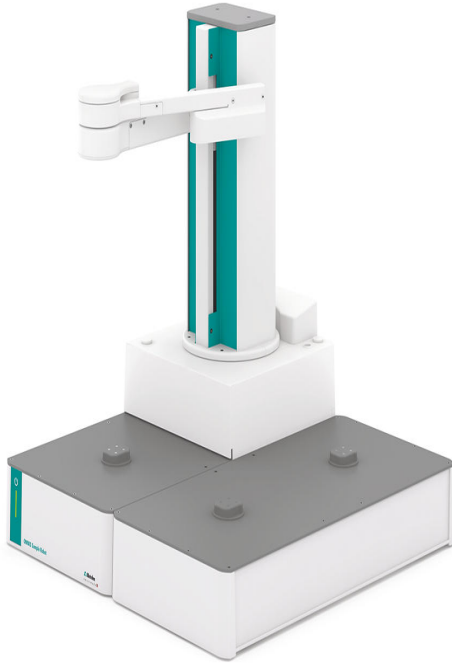

メインモジュール Pick&Place M

2.1011.0010

サイズ M の OMNIS Sample Robot Pick&Place を組み立てるためのメインモジュールです。このモジュールにはメインリフトおよびグリッパーが装備されています。完全に組み立てるには、それぞれモジュール基盤 M/L とラック基盤が必要となります。サンプルラック、グリッパーフィンガー、Pick&Place モジュールやポンプモジュールなどのワークステーションの装備によって完全動作する Sample Robot に拡充することができます。このコンポーネントの選択は、アプリケーションに合わせて行われます。

納品範囲 2.1011.0010

Order Number	説明	数量
6.02706.000	Sample Robot用のケーブルカバー ケーブルカバーは、OMNIS Sample RobotのMDLケーブルおよびイーサネットケーブルのコネクタを保護します。	1 PCS
1.1011.0020	メインモジュール Pick&Place M	1 PCS



オプションアクセサリ

6.02601.010
グリッパーフィンガー 43 ~
65 mm

外径が 43 ~ 65 mm のサンプルビーカーを掴むための OMNIS
Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガー。



6.02601.020
グリッパーフィンガー 50 ~72
mm

外径が 50 ~72 mm のサンプルビーカーを掴むための OMNIS
Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガー



2.1003.0010
スターラなしのOMNISドージン
グモジュール

滴定/ドージング用追加ビュレットによって拡張するためのOMNIS
滴定装置への接続のためのドージングモジュールです。別個の滴定
スタンドとして用いるためのマグネチックスターラもしくはプロペ
ラスターラによって拡張可能です。5、10、20、50 mLのシリン
ダーユニットが自由に選択可能です。



2.1042.0020

Dosino Module (ケーブル 2 m)



Dosino Module は、滴定や吐出、その他のリキッドハンドリングタスクのために OMNIS 滴定システムに追加のインテリジェントビュレットを装備し、省スペースで拡張するための高精度の駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ2 m)。

2.1014.0010

Pick&Place モジュール



OMNIS Sample Robots Pick&Place のモジュールキャリアへの取り付けのためのモジュール。このワークステーションに、分析用のサンプルビーカーが収容されます。分析の合間に、使用されたセンサーはPick&Placeモジュールの保管用ビーカーにて洗浄、または保管されます。分析中に攪拌する場合は、このワークステーションでは別個のプロペラスターラーを使用しなければなりません。

2.1014.0110

**スターラのついた Pick&Place
モジュール**



OMNIS Sample Robots Pick&Place のモジュールキャリアへの取り付けのためのモジュール。このワークステーションに、分析用のサンプルビーカーが収容されます。ビルトインのマグネチックスターラーにより、マグネチックスターラーを事前に取り外さなくても、外部でマグネチックスターラー機構上に準備されたサンプルを Sample Robot にて直接分析することができます。分析の合間に、使用されたセンサーはPick&Placeモジュールの保管用ビーカーにて洗浄、または保管されます。

2.1016.0010
ポンプモジュール Peristaltik
(2 チャンネル)



OMNIS Sample Robots Pick&Place のモジュールキャリアへの取り付けのためのモジュール。このワークステーションには、洗浄ポンプおよび排液ポンプが装備されています。これは、Pick&Place モジュール内のセンサーを洗浄したり、分析後のサンプルビーカーをラックに戻す前に空にするために使用されます。

2.1016.0110
ポンプモジュール Peristaltik
(4 チャンネル)



OMNIS Sample Robots Pick&Place のモジュールキャリアへの取り付けのためのモジュール。このワークステーションには、洗浄ポンプおよび排液ポンプが各々2つずつ装備されています。これは、2つのPick&Place モジュール内のセンサーを洗浄したり、分析後のサンプルビーカーをラックに戻す前に空にするために使用されます。

6.02001.010
ラック基盤



OMNIS Sample Robot のメインモジュール拡張のためのラック基盤

6.02003.010
モジュール基盤 M/L



OMNIS Sample Robot のメインモジュール M/L 拡張のためのモジュール基盤。

6.02041.010
**OMNISサンプルラック、9 x
250 mL、(PP)**




9個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック
&プレースのための OMNISサンプルラック。以下のサンプルビー
カーの使用が可能です: 6.01400.000、6.01400.003、
6.01400.100。
合成樹脂: ポリプロピレン (PP)

6.02041.030
**OMNISサンプルラック、16 x
120 mL、(PP)**



16個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック
&プレースのための OMNISサンプルラック。以下のサンプル
ビーカーの使用が可能です: 6.01400.200、6.01400.300、
6.01400.303。
合成樹脂: ポリプロピレン (PP)

6.02041.040
**OMNISサンプルラック、25 x
75 mL、(PP)**

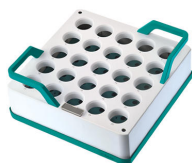

25個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック
&プレースのための OMNISサンプルラック。以下のサンプル
ビーカーの使用が可能です: 6.01402.000、6.01402.003、
6.1459.400。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)

6.05800.020

**Sample Robot M から L への
アップグレード**



このセットには、既存の OMNIS Sample Robot のサイズを M から L へアップグレードさせるために必要な全てのコンポーネントが含まれています。必要となるラック基盤およびモジュール基盤を除き、必要となるケーブル、ねじ、延長アームから機能ライセンスまで、全てが含まれています。

6.02700.000

**Pick&Place モジュールの安全
カバー**



Pick&Place モジュールの安全カバー


6.05700.000

**消耗品キット OMNIS グリッ
パー**



OMNIS Sample Robot のグリッパーフィンガーの交換用スライドスリーブおよびゴム製グリッパーフィンガー、各4つ。

6.02041.020
**OMNISサンプルラック、9 x
200 mL、(PP)**

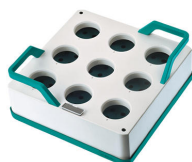

9個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック
&プレイスのための OMNISサンプルラック。以下のサンプルビー
カーの使用が可能です: 6.1459.310。
合成樹脂: ポリプロピレン (PP)

6.02064.020
**サンプルビーカー 200 mL 用
ビーカーリテーナー**



OMNIS Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガーにサン
プルビーカー 200 mLを固定するためのビーカーリテーナー

6.02041.050
**OMNISサンプルラック、9 x
150 mL、(PP)**



9個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック
&プレイスのための OMNISサンプルラック。以下のサンプルビー
カーの使用が可能です: 150 mL ビーカー (トールビーカー、注ぎ口
なし)。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)

6.02601.030
**グリッパーフィンガー 48～64
mm**

外径が 48 ～ 64 mm のサンプルビーカーを掴むための OMNIS
Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガー。



6.02601.040
**グリッパーフィンガー 28～48
mm**

外径が 28 ～ 48 mm のサンプルビーカーを掴むための OMNIS
Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガー。



6.05700.250
**6.02601.030 のための消耗品
キット OMNIS グリッパー**

OMNIS Sample Robot のグリッパーフィンガーの交換用ゴム製グ
リッパーフィンガー4つ。

