



OMNIS Multi Flow Monitor Unit

2.1056.0910

OMNIS Multi Flow Monitor Unit は OMNIS IC System で流量モニタリングとして機能します。この装置はフローのトレンド変化を検出することができます。OMNIS Software で対応する措置が定義されている場合、OMNIS IC System はこれを実行します。

流量を連続モニタリングすることは、OMNIS IC System 全体をスムーズに稼働するためにも有効です。流量の変化は、ポンプチューブの摩耗やろ過膜の汚れなど、OMNIS IC System に機能障害が生じていることを示唆しています。


OMNIS IC System から排出された液体は、最大 4 つまでのチャンネルを通り、OMNIS Multi Flow Monitor Unit の排液容器に流されます。どのチャンネルの流量も、個別に、かつ他のチャンネルから独立してモニタリングできます。4 つ以上のチャンネルを排水システムに導く場合、試薬オーガナイザー（フローモニタリングなし）に追加の排液容器を取り付けることができます。

仕様:

- 流量範囲: 0.1 ml/min ~ 8 ml/min、水の場合
- 測定チャンネル数: 4

納品範囲 2.1056.0910

Order Number	説明	数量
1.1056.0910	OMNIS Multi Flow Monitor Unit OMNIS Multi Flow Monitor Unit はOMNIS IC System で流量モニタリングとして機能します。この装置はフローのトレンド変化を検出することができます。OMNIS Software に対応する措置が定義されている場合、OMNIS IC System はこれを実行します。 流量を連続モニタリングすることは、OMNIS IC System 全体をスムーズに稼働するためにも有効です。流量の変化は、ポンプチューブの摩耗やろ過膜の汚れなど、OMNIS IC System に機能障害が生じていることを示唆しています。 OMNIS IC System から排出された液体は、最大 4 つまでのチャンネルを通り、OMNIS Multi Flow Monitor Unit の排液容器に流されます。どのチャンネルの流量も、個別に、かつ他のチャンネルから独立してモニタリングできます。4 つ以上のチャンネルを排水システムに導く場合、試薬オーガナイザー（フローモニタリングなし）に追加の排液容器を取り付けることができます。	1 PCS
6.01808.010	Y型チューブ接続部、PP製、3 x 7-8 mm 排水チューブ用コネクタ。	1 PCS

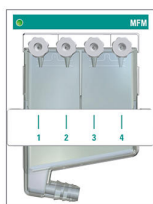

オプションアクセサリ

6.01816.000
排水チューブ、7/9 mm、1 m

シリコン製排水チューブ



6.02765.000
排液容器、4 x UNF 10/32

最大 4 本の廃液キャピラリー用排液容器。



6.02860.000
MFM センサーバー

OMNIS IC MFM Unit 用センサーバー。



6.05801.290
排出キット、M



OMNIS IC M の排水チューブおよび接続部を交換するための排出キット。

前提条件:
2105100x0 OMNIS IC M

6.05801.310
排出キット、L



OMNIS IC L の排水チューブおよび接続部を交換するための排出キット。

前提条件:
2105200x0 OMNIS IC L