



856 Conductivity Module 5-リング電気伝導度測定セルを含むTouch Control付き

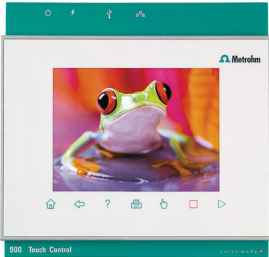
2.856.0110

ハイエンドモデルの電気伝導度測定器は900 Touch Control、5-リング電気伝導度測定セル、校正標準を含む856 Conductivity Moduleがベースとなっています。

856 Conductivity Module により、電気伝導度と温度だけでなく、TDSと塩分も測定することができます。最新テクノロジーの電気伝導度測定セル、5-リング測定セルがこれをサポートします。

Conductivity Module には、プリンター、バーコードリーダーまたはサンプルチェンジャーを接続するUSBインターフェースが2つ、スターラーまたは Dosino を接続するMSBインターフェースが4つ装備されています。900 Touch Controlと接続することにより、856 Conductivity ModuleはGLPおよびFDA 21 CFR part 11の要求仕様を満たします。

納品範囲 2.856.0110

Order Number	説明	数量
1.856.0010	856 Conductivity Module  既存のタイタランドシステムもしくは900 タッチコントロールと組み合わせた「スタンドアローン」の拡張としての導電率（電気伝導度）測定モジュール。856 導電率モジュールにより、電気伝導度と温度はもちろん、TDSと塩分濃度も測定することができます。これを支えるのが、最新テクノロジーの導電率測定セル、5-リング測定セルです。 絶縁処理した電極インポート口により、pH値および導電率は同じビーカー内で問題無く測定することができます。 導電率モジュールには、プリンター、バーコードリーダーまたはサンプルチェンジャーを接続するUSBインターフェースが2つ、スターラーもしくはドジーノを接続するMSBインターフェースが4つ装備されています。 900 タッチコントロールと接続したスタンドアローンデバイスとして、また <i>tiamo</i>™ full (ab 2.0) と接続しても、GLPおよびFDA 21 CFR part 11の要求仕様を満たします。	1 PCS
1.900.0010	900 Touch Control  タイタランド用オペレーションユニット、USBサンプルプロセッサ、856導電率モジュール、867 pHモジュール、846 ドージングインターフェース。接触感度が高く、高解像度のカラーディスプレイ、メソッドへ直接アクセスするためのお気に入りメニューによる直管的な操作。インターネットに直接繋げるための内蔵式イーサネットインターフェース、USBプリンターまたはUSBメモリースティックと接続するためのUSBインターフェースを含む。ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、ポーランド語、イタリア語。	1 PCS

6.0915.100

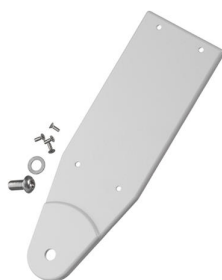
5リング電気伝導度測定セル $c = 0.7\text{cm}$ -1Pt1000付き (固定式ケーブル) 1 PCS


セル定数 $c = 0.7\text{ cm}^{-1}$ (指針値) の5リング電気伝導度測定セル、内蔵Pt1000温度センサーおよび856 Conductivity Moduleとの接続のための固定式ケーブル (1.2 m) 付き。

このセンサーは、以下のような液体などにおける中程度の電気伝導度の測定に適しています：

- 飲料水
- 表面水
- 廃水

6.2001.060

Support stand without support rod 1 PCS


6.2013.010

クランプリング 1 PCS


直径10 mmの支持棒用。

6.2016.070

Support rod / 400 mm

1 PCS



6.2021.020

Electrode holder

1 PCS



6.2324.110

Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 5 x 30 mL

1 PCS



6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors

1 PCS



6.2621.130

Hexagon key 2 mm

1 PCS



6.6064.010

USB Memory Stick for 900 Touch Control

1 PCS



オプションアクセサリ

2.801.0010 801 Stirrer



Titrimo plus、Dosimat plus、Titrimo、Sample Processor、805 Dosimat および 780/781 pH Meter を補完する Magnetic stirrer（スタンドなし）。MSB (Metrohm Serial Bus) 用常設ケーブル付き。

2.814.0010 814 USB Sample Processor (1T/1P)



小検体数から中検体数までのルーチンサンプルの連続自動処理のためのワークステーションおよび内蔵式ダイヤフラム ポンプ付きUSB サンプル・プロセッサ。LQH（リキッドハンドリング）作業のため、内蔵式ポンプの他に、ポンプをさらに1つ（ダイヤフラムポンプもしくはペリスタリックポンプ）とドージングデバイスを3つまで接続することができます。

様々な用途に対応するため、サンプルラック、スターラー、滴定ヘッド、Swing Head、サンプル容器はアプリケーションに合わせて別途ご注文ください。

制御はTouch Controlにより「スタンドアローン」で動作します。PC制御には以下のソフトウェア製品を選択することができます：滴定ソフトウェアtiamo™、クロマトグラフィーソフトウェアMagIC Net、ボルタンメトリーソフトウェアviva、またはOMNIS。

2.814.0020

**814 USB Sample Processor
(1T/2P)**



小検体数から中検体数までのルーチンサンプルの連続自動処理のためのワークステーションおよび内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ付いたUSBサンプルプロセッサ。LQH（リキッドハンドリング）作業のため、内蔵式ポンプの他に、ドージングデバイスを更に3つまで接続することができます。

様々な用途に対応するため、サンプルラック、スターラー、滴定ヘッド、Swing Head、サンプル容器はアプリケーションに合わせて別途ご注文ください。

制御はTouch Controlにより「スタンドアローン」で動作します。PC制御には以下のソフトウェア製品を選択することができます：滴定ソフトウェアtiamo™、クロマトグラフィーソフトウェアMagIC Net、ボルタンメトリーソフトウェアviva、またはOMNIS。

2.814.0030

**814 USB Sample Processor
(1T/0P)**



少検体数から中検体数までのルーチンサンプルの連続自動処理のためのワークステーション付きUSBサンプルプロセッサ。LQH（リキッドハンドリング）作業のため、ポンプを2つまで(ダイヤフラムポンプもしくはペリスタリックポンプ)、ドージングデバイスを3つまで接続することができます。

様々な用途に対応するため、サンプルラック、スターラー、滴定ヘッド、Swing Head、サンプル容器はアプリケーションに合わせて別途ご注文ください。

制御はTouch Controlにより「スタンドアローン」で動作します。PC制御には以下のソフトウェア製品を選択することができます：滴定ソフトウェアtiamo™、クロマトグラフィーソフトウェアMagIC Net、ボルタンメトリーソフトウェアviva、またはOMNIS。

6.0915.130

5リング電気伝導度測定セル $c = 1.0\text{cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル)



セル定数 $c = 1.0\text{ cm}^{-1}$ (指針値) の5リング電気伝導度測定セル、内蔵Pt1000温度センサーおよび856 Conductivity Moduleとの接続のための固定式ケーブル (1.2 m) 付き。

このセンサーは、以下のような液体などにおける中程度の電気伝導度の測定に適しています：

- 飲料水
- 表面水
- 廃水

6.0916.040

**電気伝導度測定セル $c = 0.1\text{ cm}^{-1}$ -
1Pt1000付き (固定式ケーブル)**



セル定数 $c = 0.1\text{ cm}^{-1}$ (指針値) のステンレス製電気伝導度測定セル、内蔵Pt1000温度センサーおよび856 Conductivity Moduleとの接続のための固定式ケーブル (1.2 m) 付き。

このセンサーは、脱イオン水などでの低い電気伝導度の測定、またはUSP 645>に則した測定に適しています。

6.2065.000

**Stacking frame for 846
Dosing Interface, 856
Conductivity Module, 867
pH Module**



6.2103.160

**Adapter 4 x socket B – plug
N**



6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



6.0920.100

5リング電気伝導度測定セル $c = 0.7\text{cm}$ -1Pt1000付き (固定式ケーブル 2 m)



セル定数 $c = 0.7\text{ cm}^{-1}$ (指針値) の5リング電気伝導度測定セル、内蔵Pt1000温度センサーおよびサンプルチェンジャーと組み合わせた856 Conductivity Moduleとの接続のための固定式ケーブル (2.0 m) 付き。

このセンサーは、以下のような液体などにおける中程度の電気伝導度の自動測定に適しています:

- 飲料水
- 表面水
- 廃水

6.0920.130

5リング電気伝導度測定セル $c = 1.0\text{cm}$ -1Pt1000付き (固定式ケーブル 2 m)



セル定数 $c = 1.0\text{ cm}^{-1}$ (指針値) の5リング電気伝導度測定セル、内蔵Pt1000温度センサーおよびサンプルチェンジャーと組み合わせた856 Conductivity Moduleとの接続のための固定式ケーブル (2.0 m) 付き。

このセンサーは、以下のような液体などにおける中程度の電気伝導度の自動測定に適しています:

- 飲料水
- 表面水
- 廃水