



859 Titrotherm

2.859.0010

温度測定の滴定のためのコンピューター制御による滴定モジュール。付属品なし。

納品範囲 2.859.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.859.0010	Titrotherm





オプションアクセサリ

Order no.	説明	
2.800.0010	800 Dosino (ケーブル : 1.5 m) 800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。	
2.802.0040	804 Ti Stand 用 802 Stirrer プロペラスターラ 6.1909.010 を備えるロッドスターラ。	
2.804.0010	804 Ti Stand without stand rod	
6.1414.010	滴定容器上部 開口部5つ	

6.1415.210 Titration vessel / 10-90 mL



6.2013.010 クランプリング


直径10 mmの支持棒用。



6.2026.010 Support stand with support rod



6.2061.010 Bottle holder for Dosinos

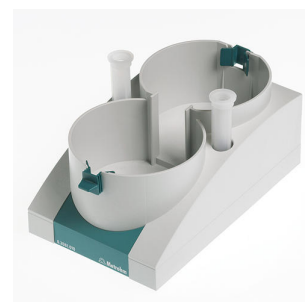

6.3032.120 807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



859 TitrothermによるTETのための高精度の温度センサー。
Thermoprobeは短い反応時間と高い分離度を有し、ごくわずかな温度変化を正確に捉えることができます。
このセンサーは、HFを含まない水性および非水系の溶液にて、以下の測定などに用いることができます：

- ASTM D8045に準じた酸価 (TAN)
- 塩基価 (TBN)
- 遊離脂肪酸
- Ca/Mg 測定
- リン酸



HFを含む媒質における859 TitrothermによるTETのための高精度の温度センサー。
Thermoprobeは短い反応時間と高い分離度を有し、ごくわずかな温度変化をも正確に捉えることができます。
このセンサーは、酸性の、フッ化物を含む溶液にて使用することができますが、有機性溶媒に対する耐性はありません。これは以下の用途などに適しています：

- ナトリウムの測定
- エッチング槽の滴定

