



899 Coulometer (2液型電極付き)

2.899.0010

スターラーが組み込まれているので、899 クーロメータがラボの卓上で必要とするのはA4サイズ以下のスペースだけです。そのコンパクトなサイズに関わらず、電量法KF水分計の能力は変わりません。水分が少ない場合でも、トレースレベルまで精密に測定することができます。2液型の指示電極および発生電極が同梱されています。推奨される測定範囲: 水分の絶対量10 µg~200 mg クーロメトリーは液体、固体、気体のトレースレベルにおける水分測定に理想的なメソッドです。更にクーロメトリーは完全なメソッドなので、KF試薬力価測定が必要ありません。

納品範囲 2.899.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.899.0010	899 Coulometer



1 PCS 6.0341.100 クーロメトリー用ダブルPtワイヤ電極

カール フィッシャー電量滴定に用いられる指示電極。



1 PCS 6.0344.100 発生電極（2液型電極付き）

カール フィッシャー電量滴定用の発生電極（2液型電極付き）、すり合わせ 29/22。

この発生電極は特に以下の用途に適しています：

- 絶対水分 50 ppm の非常に低いサンプル
- オイルサンプルにおける電量法水分測定
- ケトン試薬を用いる用途
- 低導電性試薬が用いられる用途 (クロロホルム、キシレンの追加 >10%)



1 PCS 6.1403.030 KF adsorber tube for coulometer cell



1 PCS 6.1437.000 SGJ stopper SGJ 14



2 PCS

6.1448.020

Septum 16 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1464.320

カールフィッシャー滴定容器 / 80-250 mL / 電量滴定用



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2104.120

Electrode cable / 1 m / H



1 PCS

6.2151.100

Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS

6.2164.010

卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



1 PCS

6.2701.040

GL 18 screw cap with hole



3 PCS 6.2713.000 PTFE スリーブ NS14

すり合わせ規格 14 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS 6.2713.010 PTFE スリーブ NS29

すり合わせ規格 29 による脂肪フリーのすり合わせ用スリーブ。



1 PCS 6.2713.020 PTFE スリーブ NS19

すり合わせ規格 19 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS 6.2723.310 Protective cover for Titrino plus



1 PCS

6.2738.000

Funnel



1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



2 PCS

6.2816.030

Needle with Luer connector



2 PCS

6.2816.090

Syringe 5 mL



1 PCS

6.2147.000

USBテンキーパッド

Titrimo plus、Dosimat plus、862 Compact Titrator、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler、および 899 Coulometer用のUSBテンキーパッド。コネクタが2つ付いたUSBハブを含む。



1 PCS

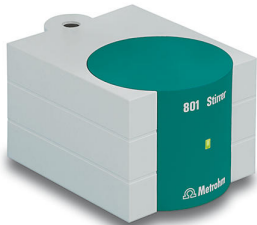
6.2047.040

滴定容器ホルダー 899/917

899 Coulometer および 917 Ti-Touch の電量測定セルのための滴定容器ホルダー



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
2.860.0010	860 KF Thermoprep	
	860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、またはは高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カールフィッシャー水分計によって測定します。	
2.885.0010	885 Compact Oven Sample Changer	
	885 コンパクトオープンサンプルチェンジャーはカールフィッシャー水分測定の加熱前処理に使用します。オープン内でサンプルは最高250℃まで加熱されます。その際に水が蒸発し、水は乾燥したキャリアガスによって分析の行われる滴定セルに運ばれます。	
2.801.0010	801 Stirrer	
2.803.0010	803 TI Stand with stirrer and pump	

6.2148.030 RS-232/USB Box

計量器、パソコン (tiBase ソフトウェア)、LIMS などの接続のため、Titrino plus を 2 つのRS-232インターフェースに拡張。ケーブル 6.2151.030 が必要です。



6.5406.000 Coulometric KF equipment, including generator electrode with diaphragm



6.5406.010 Coulometric KF equipment, including generator electrode without diaphragm



6.2164.500 Power Box for 899





2.142.0100

感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

6.2103.140

Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm



6.2103.130

Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket

