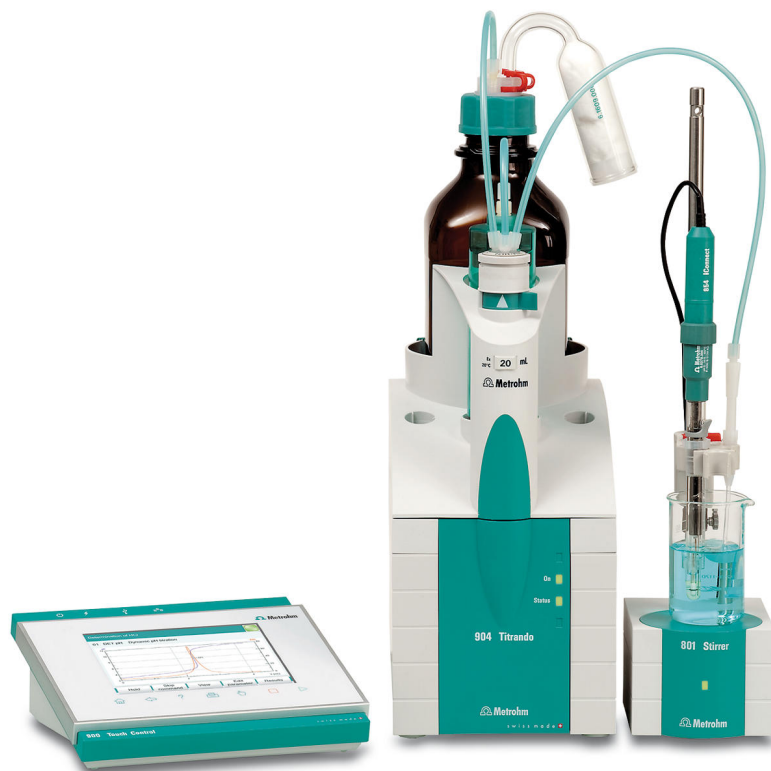




904 Titrando

2.904.0010

測定インターフェースおよび内蔵ビュレットドライブを備えた電位差滴定のためのハイエンド滴定装置。

- 内蔵ビュレットドライブ
- 変動滴下量当量点滴定 (DET)、等量滴下当量点滴定 (MET)、終点滴定 (SET)
- イオン選択性電極を用いた測定 (MEAS CONC)
- モニタリング、LQHを備えたドージング機能
- 追加スターラーまたはドージングシステムのための4つのMSBコネクタ
- インテリジェント電極「iTrode」
- USB コネクタ
- OMNISソフトウェア、*tiamo*ソフトウェアもしくはTouch Controlを適用
- GMP/GLP基準およびFDA 基準21 CFR Part 11の要件を満たしています（必要な場合）

納品範囲 2.904.0010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.904.0010

904 Titrand

以下のものを装備したインテリジェント電極 iトロードの使用におけるハイエンド自動滴定装置

- 内蔵式ビュレットドライブ
- ダイナミック滴定 (DET)、等量滴下滴定 (MET)、終点設定滴定 (SET)
- イオン選択性電極による測定 (MEAS CONC)
- 監視およびリキッドハンドリングを含むドージング機能
- MSBコネクタ4つ
- 絶縁処理の施された測定インターフェース
- USBコネクタ



1 PCS

6.2739.010

Wrench



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2148.020	RS-232/USB box



2.800.0010 800 Dosino

800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ 150 cm）。



2.801.0040 801 Stirrer with stand



2.802.0040 804 Ti Stand 用 802 Stirrer

プロペラスターラ 6.1909.010 を備えるロッドスターラ。



2.804.0040 804 Ti Stand with stand



2.805.0010 805 Dosimat



2.846.0010 846 Dosing Interface

ドージングおよびLQH作業のために、最高4つまで800 Dosino または 805 Dosimatが接続できるUSB接続可能な制御ユニット。操作には Touch Control、またはOMNISソフトウェア、tiamo™、MagIC Net、viva、あるいは797 VA Computraceがインストールされたパソコンとの接続が必要です。



6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



6.2104.600 Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 1m



6.2148.010 Remote Box MSB



6.3026.110 Exchange Unit 1 mL



6.3026.150 Exchange Unit 5 mL



6.3026.210 Exchange Unit 10 mL



6.3026.220 Exchange Unit 20 mL



6.3026.250 Exchange unit 50 mL



6.3032.120 807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



タイタランド用オペレーションユニット、USBサンプルプロセッサ、856導電率モジュール、867 pHモジュール、846 ドージングインターフェース。接触感度が高く、高解像度のカラーディスプレイ、メソッドへ直接アクセスするためのお気に入りメニューによる直管的な操作。インターネットに直接繋げるための内蔵式イーサネットインターフェース、USBプリンターまたはUSBメモリースティックと接続するためのUSBインターフェースを含む。ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、ポーランド語、イタリア語。



854 iConnect - インテリジェント電極 «iTrodes» 用の電極ケーブルと測定アンプ (ケーブル長さ 150 cm)。



854 iConnect を 867 pH Module、901~907 Titrande および 916 Ti-Touchに接続するためのミニUSBアダプタケーブル、25 cm。アダプタケーブルはストレインリリーフとして装置に挿入された状態が保たれ、854 iConnect はアダプタケーブルにのみ着脱されます。



6.2103.140 Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm



6.2151.000 Cable USB A – mini-DIN 8-pin

