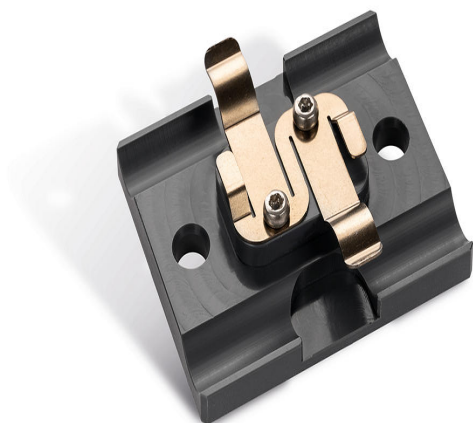




MISPホルダー、トラップカラム

6.02006.110

OMNIS MISP Unit をトラップカラムに固定するためのホルダー。

オプションアクセサリ

6.1014.000

Metrosep A Trap 1 - 100/4.0
0



溶離液流の洗浄のために用いられる大容量の陰イオンカラム。試薬の品質が「Ultrapur」や「puriss」などの最高レベルであっても、ごくわずかな陰イオンの汚れが混入している場合があります。これらはMetrosep A Trap 1 - 100/4.0によって確実に取り除くことができます。
このカラムは、特にグラジエントアプリケーションにて使用されます。

6.1014.100

Metrosep RP Trap 1 - 50/4.0



Metrosep-Säule RP Trap 1 - 50/4.0は、溶離液から有機性の汚れを取り除くために用いられます。Metrosep RP Trap 1 - 50/4.0は、ベースライン、特にグラジエントシステムにおいて、溶離液に起因する障害を防ぐために役立ちます。分離カラム Metrosep Dual 4 の p-シアノフェノール溶離液の洗浄にもその使用が推奨されます。

6.1014.150

Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0
0



Metrosep-Säule RP Trap 2 - 100/4.0は、溶離液から有機性の汚れを取り除くために用いられます。Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0は、ベースライン、特にグラジエントシステムにおいて、溶離液に起因する障害を防ぐために役立ちます。これはポリマー素材がベースとなっています。そのため、Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0は、酸性、アルカリ性のいずれのpH範囲においても使用することができます。

6.1014.200

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムは、水溶液中のイオン性、すなわち陽イオンおよび陰イオン性の汚染を除去するのに使用されます。特に「MISP」、すなわち「メトロームインラインサンプル前処理」の一環における給送水の洗浄において、その使用が推奨されます。Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムの使用により、システムブランクへの給送水の影響を大きく抑制することができます。

6.1015.000

Metrosep C Trap 1 - 100/4.0

溶離液流の洗浄のために用いられる大容量の陽イオンカラム。試薬の品質が「Ultrapur」や「puriss」などの最高レベルであっても、ごくわずかな陽イオンの汚れが混入している場合があります。これらはMetrosep C Trap 1 - 100/4.0によって確実に抑制することができます。

6.1015.200

Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4.0

溶離液からホウ酸塩の汚れを取り除くためのトラップカラム。Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4.0は主に水酸化物系溶離液による炭水化物分析において使用されます。

6.1015.300

Metrosep CO3- Trap 1 - 100/4.0

水酸化物系溶離液中の微量の炭酸塩を除去するためのトラップカラム。