



## OMNIS IC装置：PP再生

6.05332.040

Peristaltic Pump Unitを搭載したMSM再生用付属品セット。

**前提条件：**

OMNIS IC S/M/Lには以下が含まれます：

– 利用可能なOMNIS Peristaltic Pump Unitチャンネル

## 納品範囲 6.05332.040

| Order Number                                                                        | 説明                                                                                                                               | 数量    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6.02837.040                                                                         | <b>フィルター管</b><br><br>ルアーアダプター付きフィルター管、溶離液や試薬を粒子から保護します。                                                                          | 1 PCS |
|    |                                                                                                                                  |       |
| 6.05000.010                                                                         | <b>付属品キット: ボトル OMNIS IC、PP、2 L</b><br><br>試薬ボトルを Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control に取り付けるための OMNIS IC 付属品セット。 | 1 PCS |
|  |                                                                                                                                  |       |
| 6.2744.034                                                                          | <b>カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個</b><br><br>圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。                                               | 1 PCS |
|  |                                                                                                                                  |       |

6.01803.110

**PTFE 製キャピラリー RO - PP、900/0.5 mm****1 PCS**

OMNIS IC 用表示ラベル付きのカット済み PTFE 製キャピラリー



6.01826.010

**ポンプチューブ、内径 0.5 mm、オレンジ - 黄****1 PCS**


OMNIS IC System で Peristaltic Pump Unit を使用するための、内径 0.5 mm のポンプチューブ。このチューブを使用することで、透析、サブレッサー再生、または PCR 溶液などの液体を、制御された状態で確実に輸送することができます。稼働中のフロー性能を安定させるように設計されています。その材料特性は、通常の分析条件下でも安定した機能性をサポートします。



## オプションアクセサリ

2.1056.1010

### OMNIS Peristaltic Pump Unit 1-Channel

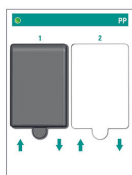

OMNIS Peristaltic Pump Unit は、OMNIS IC System で、サンプルや補助溶液を輸送するペリスタリックポンプとして機能します。ペリスタリックポンプは変位の原理に従って、すなわち、ポンプチューブを外部から機械的に変形させ、ポンプチューブから液体を押し出して稼働します。ポンプチューブは回転するローラーヘッドに押しつぶされ、変形します。


1 チャンネルペリスタリックポンプは、2 チャンネルペリスタリックポンプに拡張できますが、その際、両方のチャンネルを異なる回転数で稼働できます。

仕様:

- チャンネル数: 1 (2チャンネルまで拡張可能)
- 増加回転数: 2.5 rpm
- 最小回転数: 2.5 rpm
- 最大回転数: 250 rpm
- 回転方向: 時計回り

2.1056.1020

### OMNIS Peristaltic Pump Unit 2-Channel

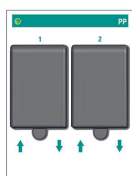

OMNIS Peristaltic Pump Unit は、OMNIS IC System で、サンプルや補助溶液を輸送するペリスタリックポンプとして機能します。ペリスタリックポンプは変位の原理に従って、すなわち、ポンプチューブを外部から機械的に変形させ、ポンプチューブから液体を押し出して稼働します。ポンプチューブは回転するローラーヘッドに押しつぶされ、変形します

どちらのチャンネルも別々に異なる回転数で稼働できるため、様々な用途での柔軟性が向上します。

仕様:

- チャンネル数: 2
- 増加回転数: 2.5 rpm
- 最小回転数: 2.5 rpm
- 最大回転数: 250 rpm
- 回転方向: 時計回り