



## **"ProfIC 11 – Anion" – Professional IC System for trace analysis with Inline Calibration, Sample Preconcentration, Matrix Elimination and Neutralization**

ProfIC-11-Anion

The Professional IC system with conductivity detection enables ultratrace analysis of anions in complex matrices. "ProfIC 11" with Metrohm Inline Neutralization, Inline Sample Preparation and Inline Matrix Elimination enables chromatography without limitation by the matrix and guarantees a long lifetime of the analytical separation column.

Schematic diagram

## 納品範囲 ProfIC-11-Anion

| Order Number                                                                        | 説明                                                                                                                                                                                                                                    | 数量    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.800.0010                                                                          | <b>800 Dosino (ケーブル : 1.5 m)</b><br><br>800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。                                                                                                            | 1 PCS |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 2.850.9010                                                                          | <b>IC Conductivity Detector</b><br><br>インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は (自動のものも含めて) 必要ありません。                      | 1 PCS |
|  |                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 2.858.0030                                                                          | <b>858 Professional Sample Processor – Pump – Injector</b><br><br>858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ : ポンプ – インジェクター は、500 $\mu$ Lから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプもしくは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。更にサンプル前処理では、六方向注入バルブの使用が可能です。 | 1 PCS |
|  |                                                                                                                                                                                                                                       |       |

6.1014.200



### **Metrosep I Trap 1 - 100/4.0**

1 PCS

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムは、水溶液中のイオン性、すなわち陽イオンおよび陰イオン性の汚染を除去するのに使用されます。特に「MISP」、すなわち「メトロームインラインサンプル前処理」の一環における給送水の洗浄において、その使用が推奨されます。

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムの使用により、システムブランクへの給送水の影響を大きく抑制することができます。

6.1825.270



### **Transfer tubing 10 mL PEEK 1/8 in**

1 PCS

6.3032.150



### **807 Dosing Unit 5 mL**

1 PCS

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

6.5330.040



### **IC equipment for Liquid Handling with the Dosino**

1 PCS

## オプションアクセサリ

6.1006.500

### **Metrosep A Supp 5 Guard /4.0**



Metrosep A Supp 5 Guard/4.0は、IC陰イオンカラムMetrosep A Supp 5 および 7をサンプルや溶離液による汚れからしっかりと守ります。

これはMetrosep A Supp 5と同じ分離材料を有し、また同様にPEEK製であり、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けことができます（「On Column Guard System」）。ガードカラムは、クロマトグラフィーにおける分離性能に影響を与えることなく、分析用カラムの寿命を延ばします。安価で取扱いが容易であるため、A Supp 5 Guard/4.0の使用が大変推奨されています。

6.1006.530

### **Metrosep A Supp 5 - 250/4. 0**



困難な分離作業のための理論段数の極端に高い、メトローム社が開発した高性能分離カラム。複雑な分離問題も、Metrosep A Supp 5 - 250/4.0によって容易かつ再現可能に解決できます。カラムの容量が高いので、例えば、サンプル前処理なしの、150 mg/Lの塩化物、並びに1 µg/Lの臭素酸塩の証明も可能です。このカラムの適用範囲は、標準陰イオンの証明にとどまりません。Metrosep A Supp 5 - 250/4.0は、半導体産業や発電所のボイラー給水における高い純度基準の確実な検査が重要な場合に選択されるカラムです。

6.1608.080

### **Bottle / 300 mL**




**6.2041.390**  
**サンプルラック、16 x 100**  
**mL、(ポリ塩化ビニル製)**



16 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrator「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です：  
100 mL ガラスビーカー、ショートビーカー。  
合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

**6.2820.000**  
**アルミホイル**

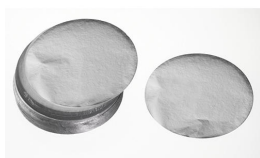

直径 80 mm の円形シート 1000 枚。厚さ: 0.010 mm。サンプルビーカー 6.1432.210 用に ホイルホルダー 6.2037.040 を、および サンプルビーカー 6.1459.300 用にホイルホルダー 6.2037.080 をともに使用します。

**6.5333.000**  
**IQ/OQ Kit for IC**



**6.5620.000**  
**807 Dosing Unit との接続セッ**  
**ト: ポート 4**



807 Dosing Unit のポート 4 に M6 チューブを接続するためのセット (ルアーから M6 へ)、ホルダー固定機能付き