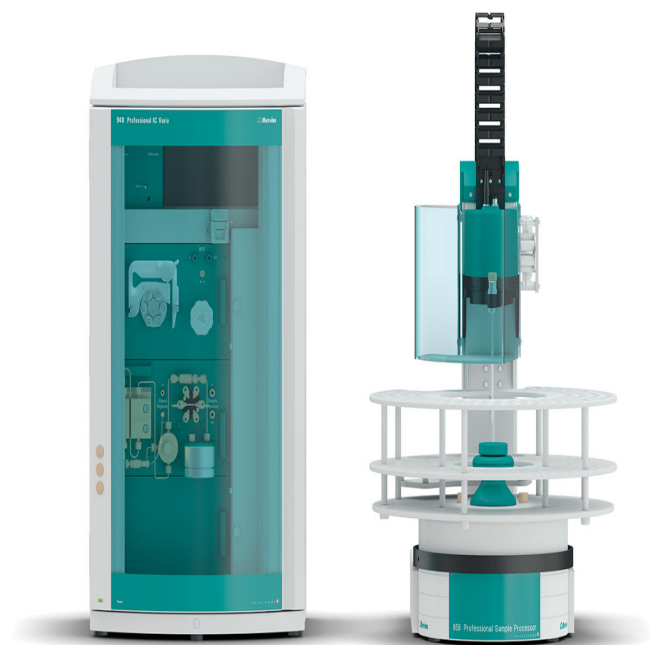




「ProfIC Vario 1 Anion」 – 自動イオンクロマトグラフィー用 Professional IC Vario システム

ProfIC-Vario-01-Anion

連続サプレッション機能と電気伝導度検出機能を備えた Professional IC Vario システムは、陰イオンまたは陽イオンを完全自動で測定することができます。

典型的な使用領域:

- 汎用的に使用可能な、陰イオンまたは陽イオン分析
- 追加サンプル前処理のないサンプルスループットの高いルーチン分析
- 研究/開発タスク用の MS 機器あるいは ICP/MS 機器との連結

概略図

納品範囲 ProfIC-Vario-01-Anion

Order Number	説明	数量
2.940.1500	940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP  <p>940 プロフェッショナル IC Vario ONE/SeS/PP は連続サプレッションとサプレッサー再生のためのペリスタリックポンプを備えたインテリジェントIC装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。</p> <p>典型的な使用領域:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 連続サプレッションおよび電気電導度検出器による陰イオンの測定 - 陰イオンのトレース分析 - 陰イオンのオンラインモニタリング 	1 PCS
2.850.9010	IC Conductivity Detector  <p>インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。</p>	1 PCS
2.858.0020	858 Professional Sample Processor – Pump  <p>858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ - ポンプは、500 μLから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプまたは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。</p>	1 PCS

オプションアクセサリ

6.2041.760

**Sample rack 54 x 11 mL + 1
x 300 mL**



6.2041.440

**サンプルラック、148 x 11 mL
および 3 x 300 mL、(ポリ塩化
ビニル製)**



148 個のサンプル容器および3個のリンスボトルに適した 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。
合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.2743.040

**PP バイアル、2.5 mL、2000
個**



2.5 mL。2000 個。IC Sample Processors 用。
ICサンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン (PP) 樹脂製です。製造および梱包は、無菌室およびクリーンルーム (DIN ISO 14644に準拠したクリーンルームクラス 7) の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.2743.050

サンプル容器 11 mL



2000 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.2743.070

Stopper with perforation



6.2842.000

MSM-HC Rotor A



6.2844.000

MSM-LC Rotor A



6.2832.000

MSM Rotor A



6.2842.020

アダプタスリーブ、MSM



アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。

2.941.0010

941 Eluent Production Module



941 溶離液生成モジュール により、溶離液の自動製造が可能となります。このモジュールは、手動で介入しなくても連続して処理することを可能にし、安定した保持時間を保証します。このモジュールはあらゆるメトロームのICデバイスと接続させることができ、MagIC Netによって制御されます。

6.5330.130

ICアクセサリ: リキッドハンドリングステーション(左)



プロフェッショナルサンプルプロセッサのリキッドハンドリングステーションの設置のための付属品セット。洗浄水の供給はペリスタリックポンプもしくはドジーノ電動ビュレットによって行われます。

6.2842.200

MSM-HC Rotor C



6.6059.422

MagIC Net 4.2 Professional:

1ライセンス



6.6059.423

MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライ

センス

